

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медтехпром+»



В.А. Белых


«01» апреля 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


*Маска медицинская однократного применения
по ТУ 32.50.50-007-61593132-2020*

2021 г.


Маска медицинская однократного применения на резинке голубая

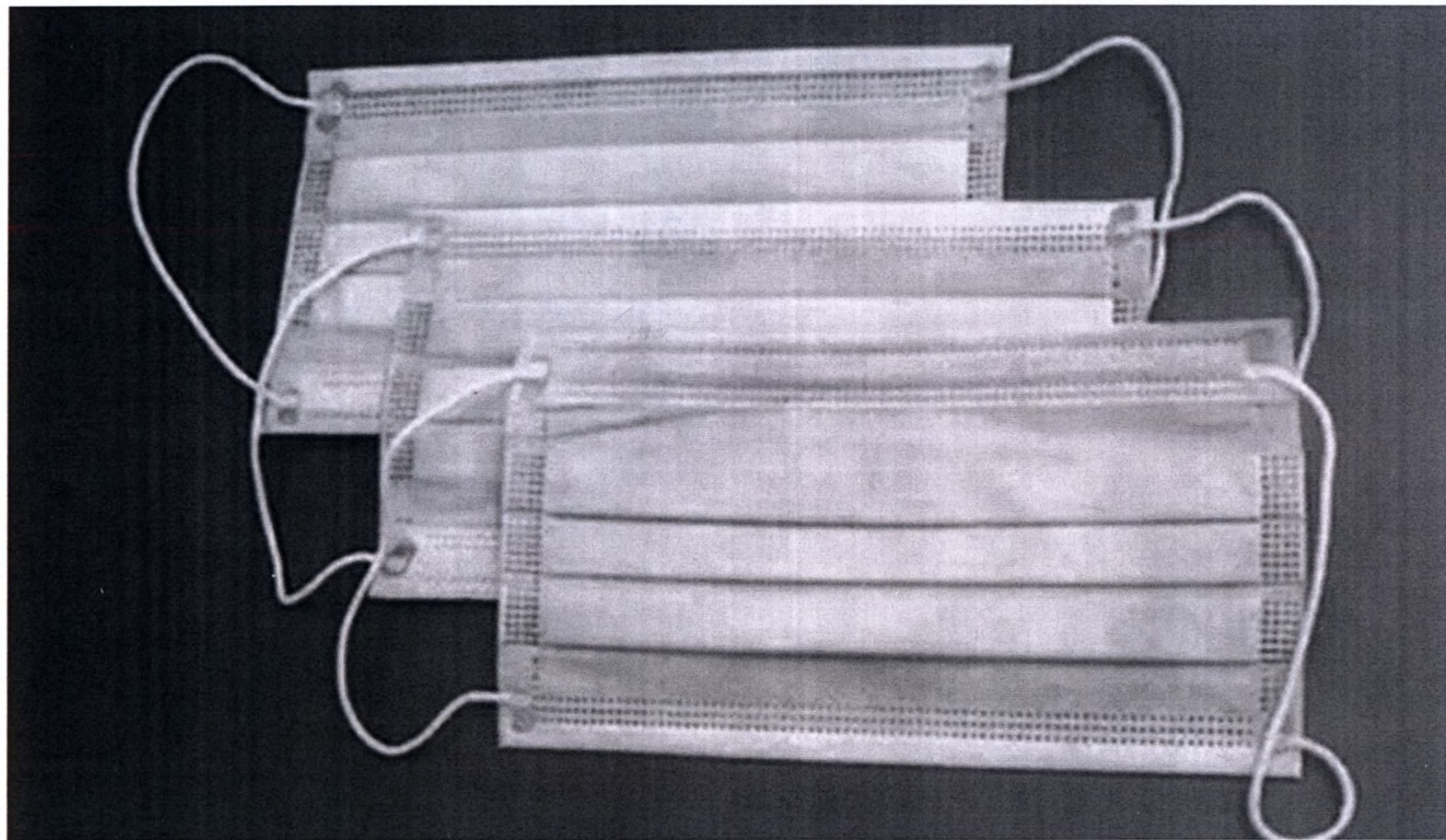


Маска медицинская однократного применения на резинке белая

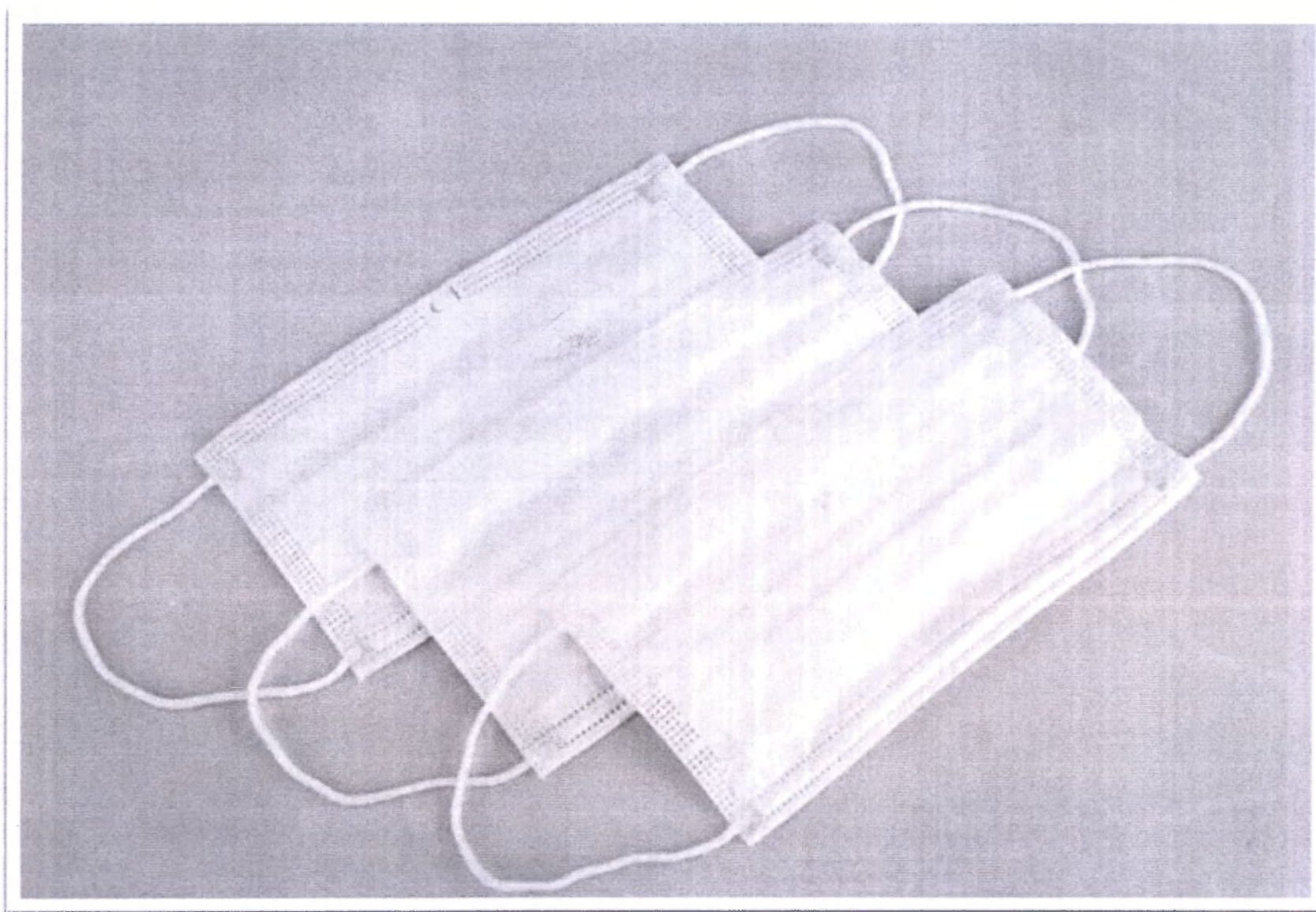

Маска медицинская однократного применения на резинке бело-голубая

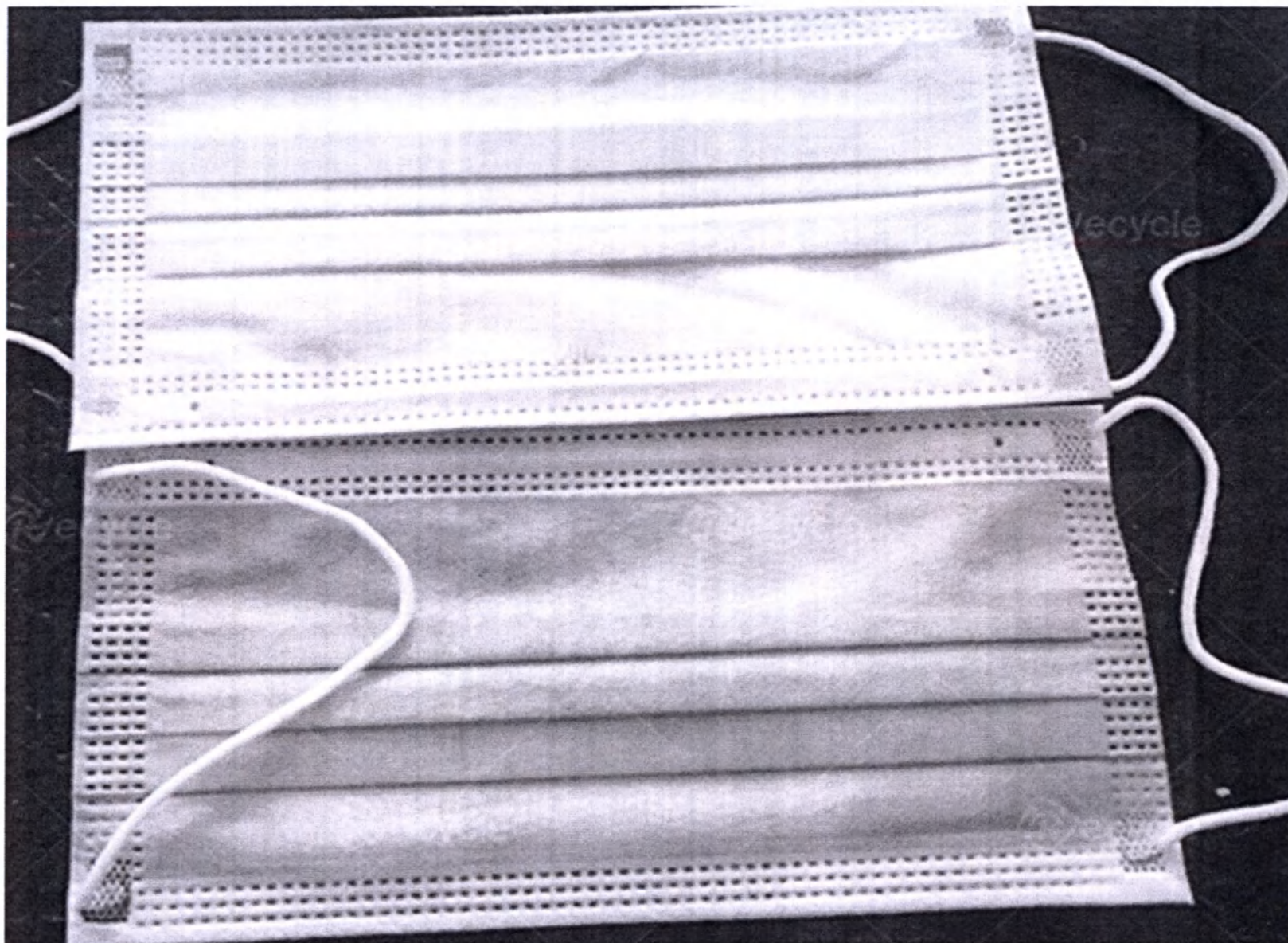

Проект маркировочной этикетки первичной упаковки

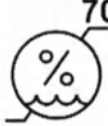	 ООО «Медтехпром+» Юридический адрес: 143912, Московская обл., Балашихинский р-он, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов (Западная коммунальная зона), владение 1 А, пом. II. Адрес производства: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84 Телефон: (495) 971-78-47			
Маска медицинская однократного применения				
ТУ 32.50.50-007-61593132-2020				
Предназначена для снижения риска распространения инфекции воздушно-капельным путем				
LOT	Номер партии		Цвет	☐ Голубая ☐ Белая ☐ Бело-голубая
Размер изделия		L=17,0±0,5 см, B=9,5±0,5 см		Количество <u>шт.</u>
Сведения о регистрации		РЗН 2020/10889 от 19.06.2020		
Условия хранения		    Тип маски по ГОСТ Р 58396: Тип I		
Условия транспортирования				
Условия эксплуатации		   		
		Годен до – 5 лет со дня изготовления		
 Дата изготовления				НЕТТО: _____ кг


Проект маркировочной этикетки транспортной упаковки

	 ООО «Медтехпром+» Юридический адрес: 143912, Московская обл., Балашихинский р-он, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов (Западная коммунальная зона), владение 1 А, пом. II. Адрес производства: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84 Телефон: (495) 971-78-47		
Маска медицинская однократного применения по ТУ 32.50.50-007-61593132-2020 Предназначена для снижения риска распространения инфекции воздушно-капельным путем			
Количество в упаковке _____ шт.	Цвет	☐ Голубая ☐ Белая ☐ Бело-голубая	Тип маски по ГОСТ Р 58396: Тип I
LOT	Номер партии		
Размер изделия	L=17,0±0,5 см, B=9,5±0,5 см		Количество шт.
Сведения о регистрации	РЗН 2020/10889 от 19.06.2020		
Условия хранения			
Условия транспортирования			
	Дата изготовления БРУТТО		

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ) ТАРЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маска медицинская однократного применения по ТУ 32.50.50-007-61593132-2020

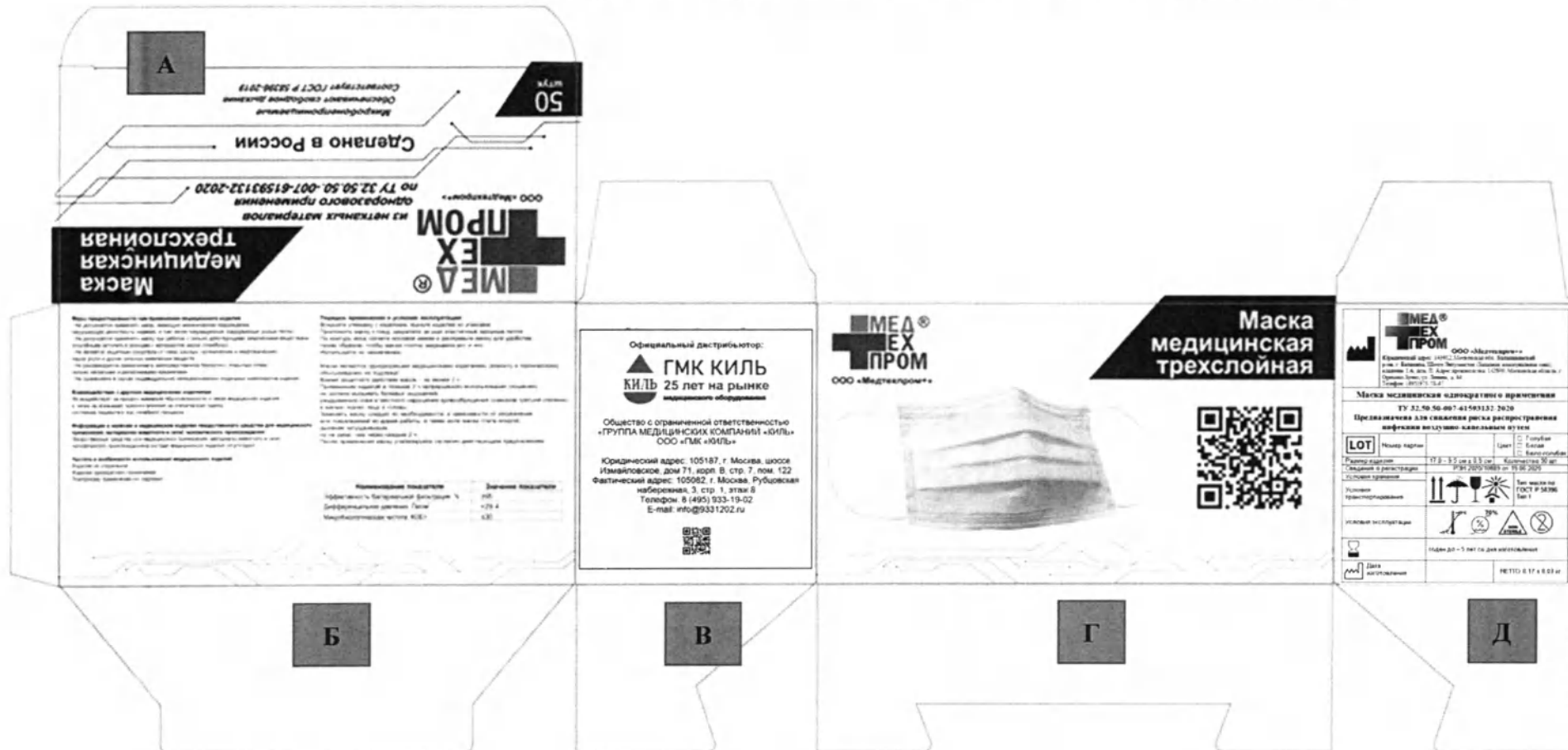

Вид А



ООО «Медтехпром+»

**Маска
медицинская
трехслойная**

*из нетканых материалов
одноразового применения
по ТУ 32.50.50.-007-61593132-2020*

Сделано в России

*Микробонепроницаемые
Обеспечивают свободное дыхание
Соответствует ГОСТ Р 58396-2019*

**50
штук**

Вид Б

Меры предосторожности при применении медицинского изделия

- Не допускается применять маску, имеющую механические повреждения, нарушающие целостность изделия, в том числе поврежденные (надорванные ушные петли).
- Не допускается применять маску при работах с сильно действующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом маски (спанбонд).
- Не является защитным средством от газов (кислых, органических и неорганических), паров ртути и других сильных химических веществ.
- Не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами.
- Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Не воздействует на процесс взаимной обусловленности и связи медицинских изделий, а также не оказывают прямого влияния на клиническую оценку состояния пациента и ход лечебного процесса.

Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и (или) человеческого происхождения в составе медицинского изделия отсутствуют.

Частота и особенности использования медицинского изделия

Изделие не стерильное

Изделие однократного применения

Повторному применению не подлежит

Порядок применения и условия эксплуатации

Вскройте упаковку с изделием, выньте изделие из упаковки.

Приложите маску к лицу, закрепите за уши эластичные заушные петли.

По контуру носа согните носовой зажим и расправьте маску для удобства таким образом, чтобы маска плотно закрывала рот и нос.

Используйте по назначению.

Маски являются одноразовыми медицинскими изделиями, ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

Время защитного действия масок – не менее 2 ч.

Применение изделий в течение 2 ч непрерывного использования (ношения) не должно вызывать болевых ощущений,

раздражения кожи и местного нарушения кровообращения (наминов третьей степени) в мягких тканях лица и головы.

Заменять маску следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы, а также если маска стала мокрой, дыхание затрудненным,

но не реже, чем через каждые 2 ч.

После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Наименование показателя	Значение показателя
Эффективность бактериальной фильтрации, %	≥95
Дифференциальное давление, Па/см ²	<29.4
Микробиологическая чистота, КОЕ/г	≤30

Вид В

Официальный дистрибьютор:



**Общество с ограниченной ответственностью
«ГРУППА МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ «КИЛЬ»
ООО «ГМК «КИЛЬ»**

**Юридический адрес: 105187, г. Москва, шоссе
Измайловское, дом 71, корп. В, стр. 7, пом. 122
Фактический адрес: 105082, г. Москва, Рубцовская
набережная, 3, стр. 1, этаж 8
Телефон: 8 (495) 933-19-02
E-mail: info@9331202.ru**




Вид Г




ООО «Медтехпром+»

**Маска
медицинская
трехслойная**

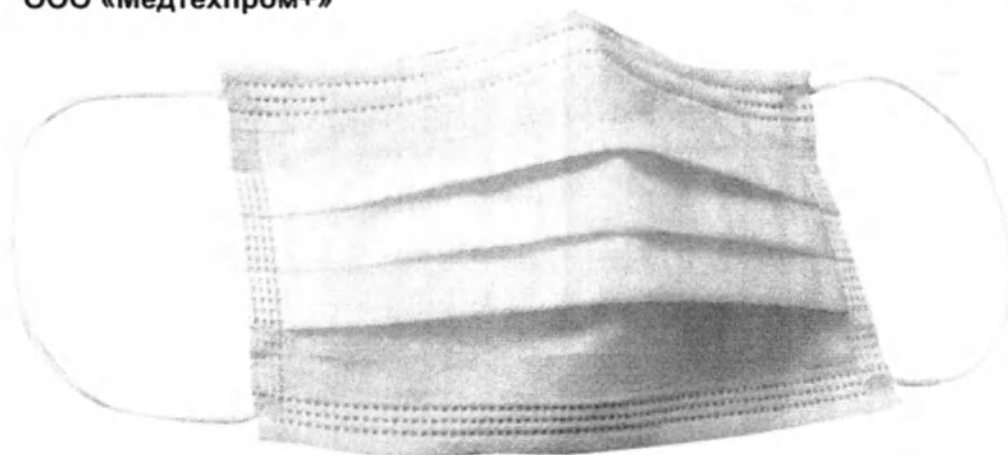

Вид Д

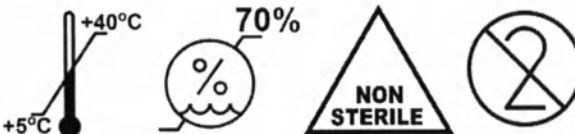	 ООО «Медтехпром+» Юридический адрес: 143912, Московская обл., Балашихинский р-он, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов (Западная коммунальная зона), владение 1 А, пом. II. Адрес производства: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84 Телефон: (495) 971-78-47		
Маска медицинская однократного применения			
ТУ 32.50.50-007-61593132-2020			
Предназначена для снижения риска распространения инфекции воздушно-капельным путем			
LOT	Номер партии		Цвет ☐ Голубая ☐ Белая ☐ Бело-голубая
Размер изделия		17,0 – 9,5 см ± 0,5 см	Количество 50 шт.
Сведения о регистрации		РЗН 2020/10889 от 19.06.2020	
Условия хранения		 Тип маски по ГОСТ Р 58396: Тип I	
Условия транспортирования			
Условия эксплуатации			
		годен до – 5 лет со дня изготовления	
 Дата изготовления			НЕТТО 0,17 ± 0,03 кг

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 12 (двенадцать) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «Медтехпром+»

В. А. Белых

