

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

***Шприцы инъекционные однократного применения
стерильные с иглой/иглами для инсулина
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020***

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор


ООО "Группа СТК"

Ракир Б.С.



**1. Примеры упаковки и маркировки медицинского изделия:
"Шприцы инъекционные однократного применения стерильные для
инсулина в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020"**

Пример потребительской упаковки шприцев

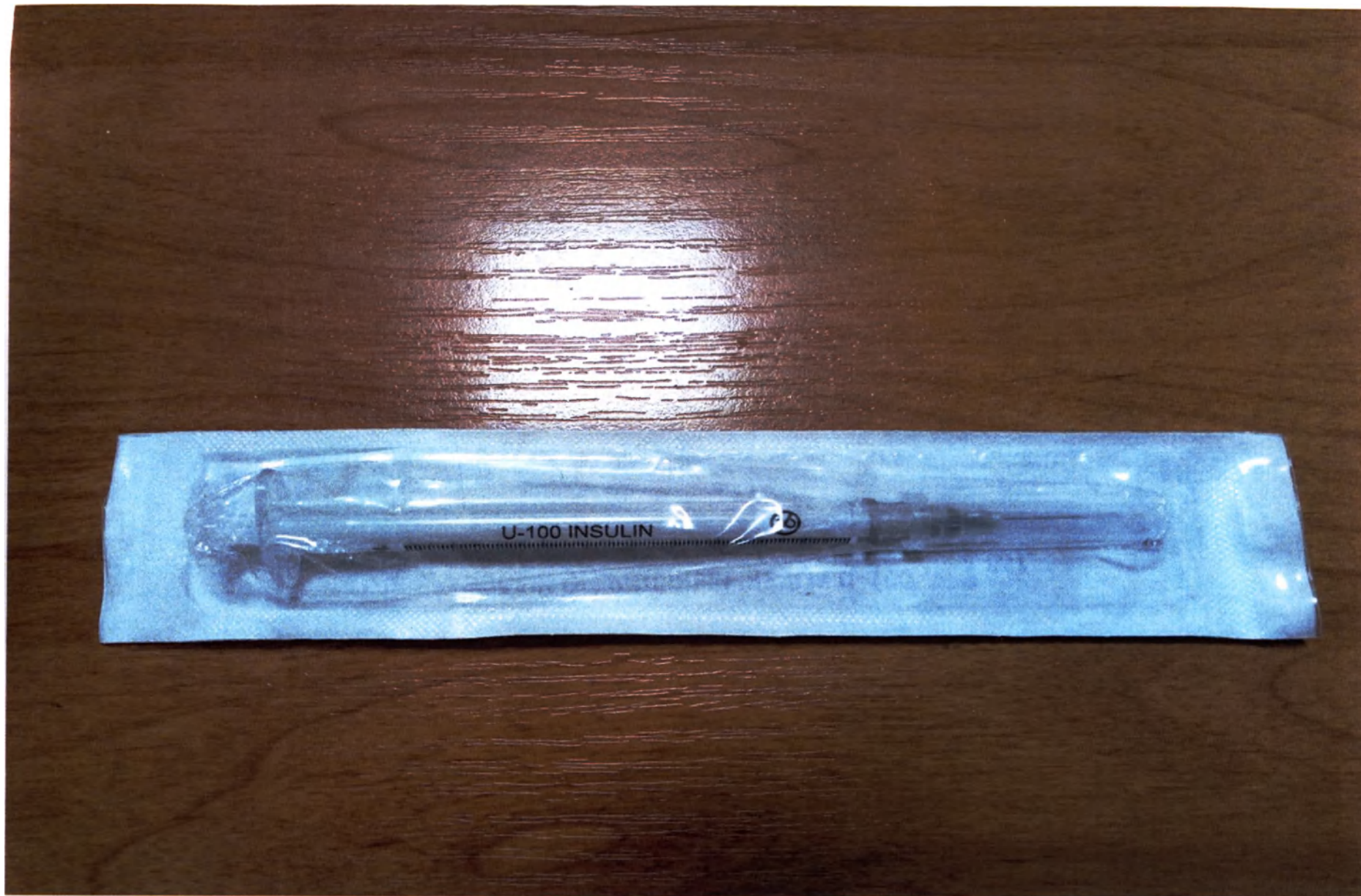

Пример маркировки шприцев



**2. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с
иглой/иглами для инсулина в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020**

Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный, типа " Луер " для инсулина U-100, со съемной иглой.



Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный, типа " Луер " для инсулина U-100, со съемной иглой.



Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный для инсулина U-100, с встроенной иглой.



Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный, типа " Луер " для инсулина U-100, с двумя съемными иглами.



Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный, типа " Луер " для инсулина U-100, с двумя съемными иглами.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 10 листа(ов)

Директор
ООО «Группа СТК»



Ракир Б.С.

АЛЬБОМ

упаковки медицинского изделия

***Шприцы инъекционные однократного применения
стерильные с иглой/иглами для инсулина
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020***

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО "Группа СТК"

Ракир Б.С.



**1. Пример потребительской упаковки медицинского изделия:
"Шприцы инъекционные однократного применения стерильные для
инсулина в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020"**


Пример потребительской упаковки шприцев



Пример потребительской шприцев



Пример потребительской упаковки

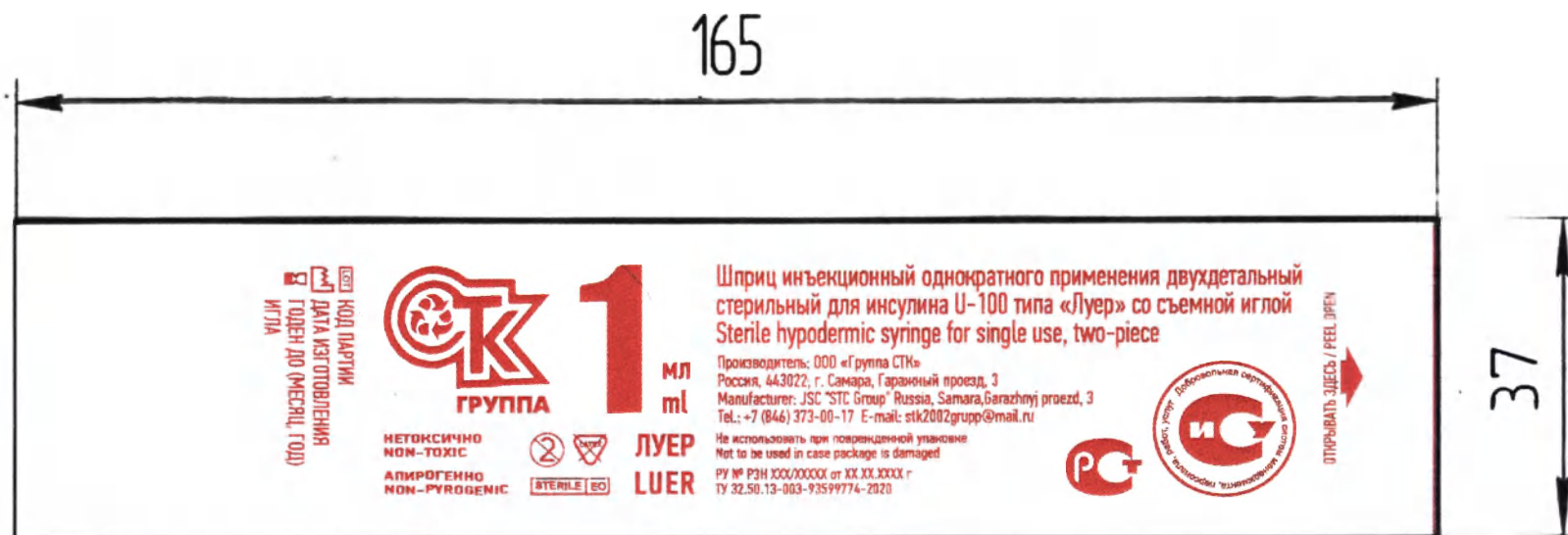

**2.Пример групповой упаковки медицинского изделия:
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с
иглой/иглами для инсулина в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020**




Фото групповой упаковки №100



(203) короб с/сборн., 350 x 150 x 80, Шприц 1А 0.4x13, Т-22 В бел.



Заказчик	Группа СТК	Профиль гофра	В	Особые требования, примечания		ФИО	Дата
Наименование	короб с/сборн., 350 x 150 x 80, Шприц 1А	Скрепление клапана	без склейки		Исполнитель	Никифоров Ю.Н.	02.08.2020
Марка гофрокартона	T-22 бел	Линия переработки			Согласовано		
ГОСТ/ТУ	ТУ 5471-002-92409501-2015	Комплектующие	Ш/ф 14-A1185		203 (350x150x80)	Утверждено	

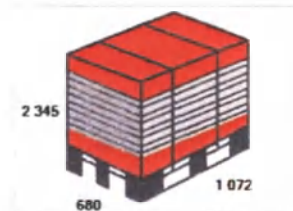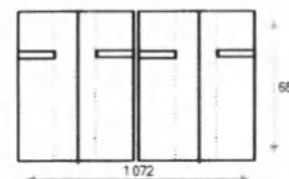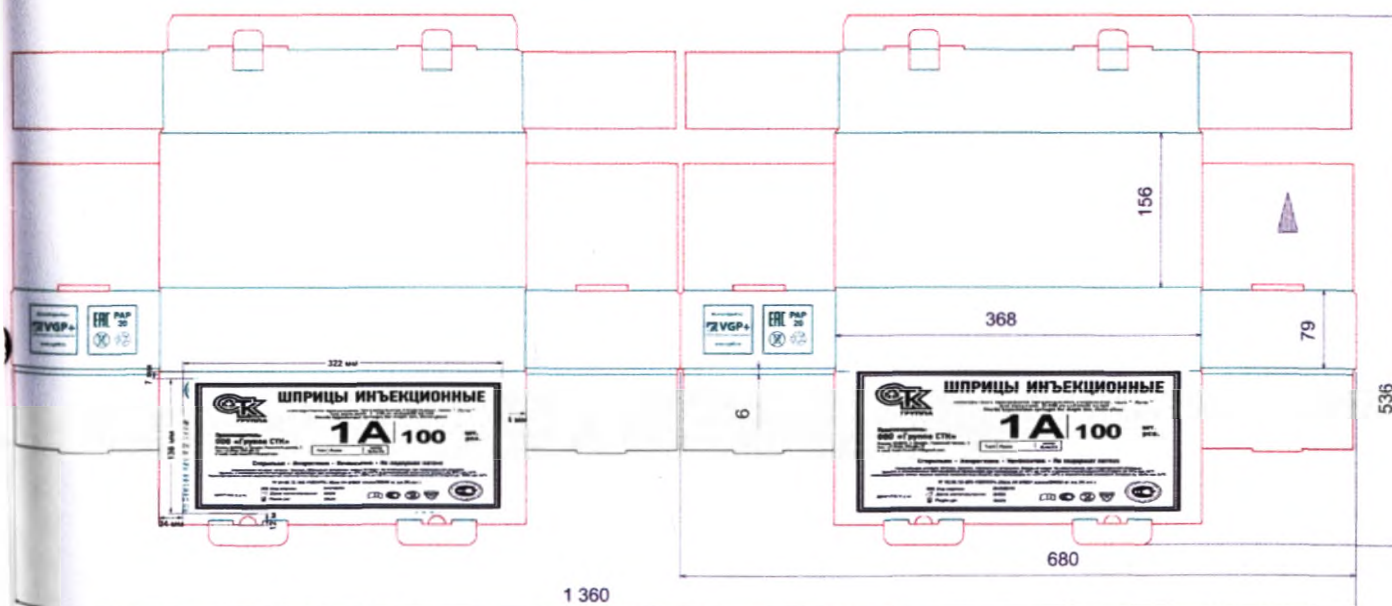

1. Лотки складываются в кипы.
2. Пакет формируется на поддоне 1200x800 и защищается гофроуголками, по всему периметру сверху и снизу.
3. Пакет формируется на 2-х подкладных листах, укладываемых крест-накрест. Сверху пакета укладываются 2 таких же листа.
4. Между рядами в пакете прокладываются листы гофрокартона (отбраковка).
5. Пакет обвязывается п/п лентой в два пояса по длине на одинаковом расстоянии (не менее 200 мм) от левого и правого края пакета. Притягивается п/п лентой к поддону.
6. Стрейч - пленка не менее 2-х слоев.

**2.Пример транспортной упаковки медицинского изделия: Шприцы
инъекционные однократного применения стерильные с иглой/иглами для
инсулина в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020**

Фото транспортной упаковки №100





Технологическая карта транспортной упаковки №100

(281) короб, 485 x 375 x 270, печ. 2 цв., Т-25 С бур.




Технические требования		Карта раскроя			Транспортный пакет	
		Внутренние размеры, мм	485	375	270	В пачке, шт.
Заказчик	Группа СТК	Размеры заготовки, мм	652	1780		20
Наименование	короб, 485 x 375 x 270, печ. 2 цв., Т-25 бур.	Площадь заготовки, м2	1,1606	Сырье по слоям		Количество рядов, шт.
Марка гофрокартона	Т-25	Площадь ящика, м2	1,154	Т-25		13
ГОСТ/ТУ	ТУ 5471-002-92409501-2015	Площадь печати				В ряду, шт.
		Цвет печати (Pantone)	P.356, Black	Клише "Группа СТК 1А"		2
		Исполнение ящика	A			В трансп. пакете, шт.
		Клапан	Тип I, исп. 1			520
		Профиль гофра	C	Особые требования, примечания		Длина пакета, мм.
		Скрепление клапана	склейка			1304+40
		Линия переработки	5РА			Ширина пакета, мм.
		Комплектующие	нет			866+40
						Вид упаковки
						20x2x13
						Высота пакета, мм.
						2255
						ФИО
						Никифоров Ю.Н.
						Дата
						02.08.2020

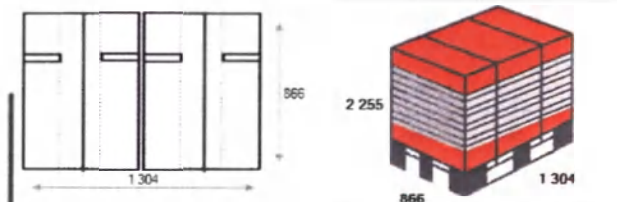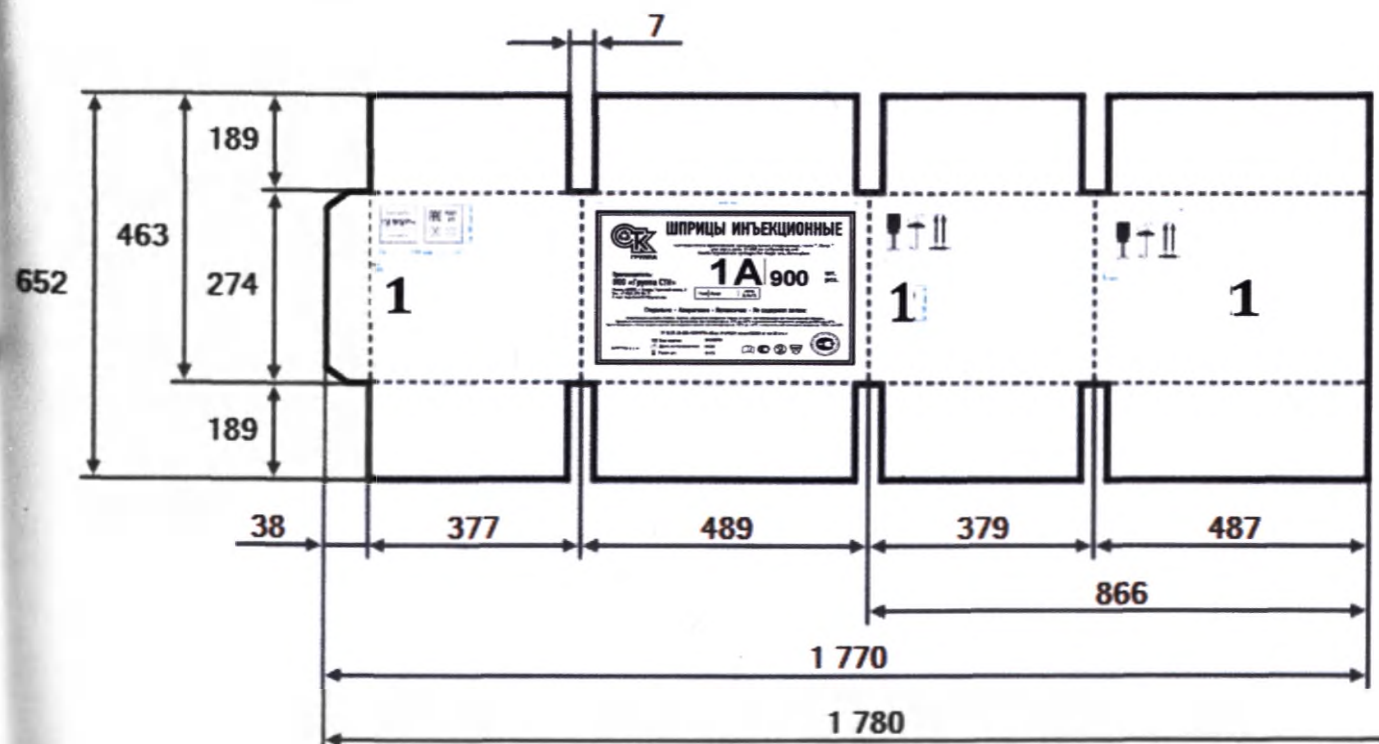

1. Ящики складываются в пачки и обвязываются п/п лентой в один пояс.
2. Пакет формируется на поддоне 1200x800 и защищается гофроуголками, по всему периметру сверху и снизу.
3. Пакет формируется на 2-х подкладных листах, укладываемых крест-накрест. Сверху пакета укладываются 2 таких же листа.
4. Между рядами в пакете прокладываются листы гофрокартона (отбраковка).
5. Пакет обвязывается п/п лентой в два пояса по длине на одинаковом расстоянии (не менее 200 мм) от левого и правого края пакета. Притягивается п/п лентой к поддону.
6. Стрейч - пленка не менее 2-х слоев.

**2.Пример универсальной транспортной упаковки медицинского изделия:
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглой/иглами для
инсулина в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-003-93599774-2020**



Фото универсальной транспортной упаковки

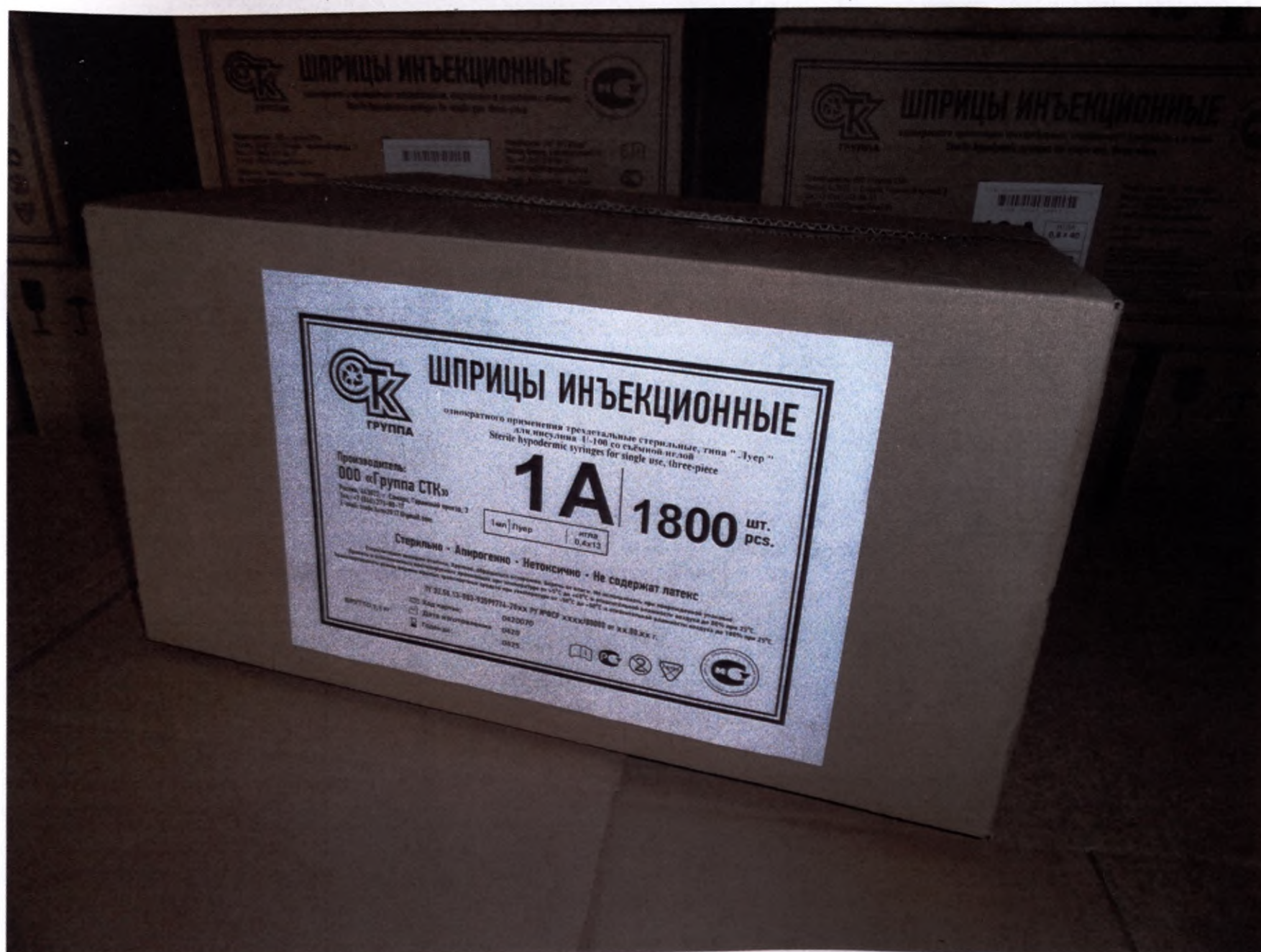

Технологическая карта универсального короба

(1256) короб, 480 x 360 x 250, печ. 1 цв., Т-25 С бур.


 VGP+ Качественный гофрокартон		Карта раскроя			Транспортный пакет			
		Внутренние размеры, мм	480	360	250	В пачке, шт.	20	
		Размеры заготовки, мм	618	1740		Количество рядов, шт.	14	
		Площадь заготовки, м2	1,0753	Сырье по слоям		В ряду, шт.	2	
		Площадь ящика, м2	1,06914	Т-25		В трансп. пакете, шт.	560	
		Площадь печати				Длина пакета, мм.	1236+40	
		Цвет печати (Pantone)	Black	Клише " Шприцы Группа СТК "		Ширина пакета, мм.	846+40	
		Исполнение ящика	A			Вид упаковки	20x2x14	
Технические требования		Клапан	Тип I, исп. 1	Папа - мама	Высота пакета, мм.	2415		
Заказчик	Группа СТК	Профиль гофра	C	Особые требования, примечания		ФИО	Дата	
Наименование	короб, 480 x 360 x 250, печ. 1 цв., Т-25	Скрепление клапана	склейка		Исполнитель	Никифоров Ю.Н.	28.10.2020	
Марка гофрокартона	T-25	Линия переработки	5РА	1256	Согласовано			
ГОСТ/ТУ	ТУ 5471-002-92409501-2015	Комплектующие	нет		Утверждено			

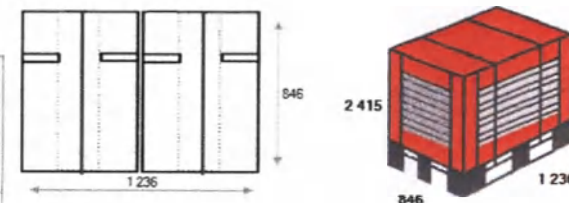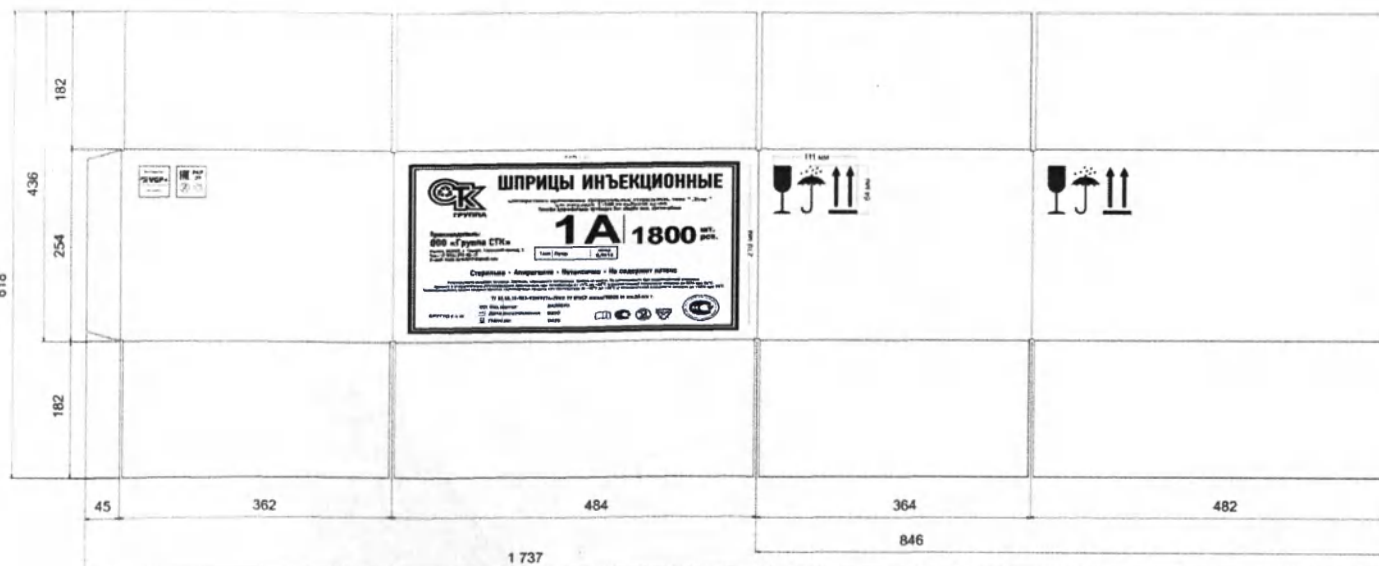

1. Ящики складываются в пачки и обвязываются п/п лентой в один пояс.
2. Пакет формируется на поддоне 1200x800 и защищается гофроуголками, по всему периметру сверху и снизу.
3. Пакет формируется на 2-х подкладных листах, укладываемых крест-накрест. Сверху пакета укладываются 2 таких же листа.
4. Между рядами в пакете прокладываются листы гофрокартона (отбраковка).
5. Пакет обвязывается п/п лентой в два пояса по длине на одинаковом расстоянии (не менее 200 мм) от левого и правого края пакета. Притягивается п/п лентой к поддону.
6. Стрейч - пленка не менее 2-х слоев.

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 14 листа(ов)

Директор
ООО «Группа СТК»

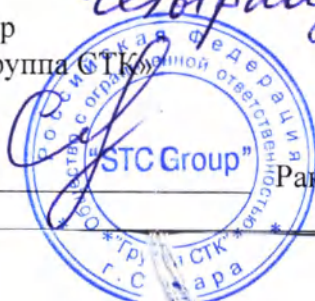

Ракир Б.С.