

서울 중구 무교로 15, 301호
(무교동, 남강빌딩)
[별지 제41호서식]

공증인가
법무법인

코러스

(전화) 02-753-2003
(팩스) 02-747-3832

Registered No. 2022 - 11687


NOTARIAL CERTIFICATE

Law Firm
CHORUS

15, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul, Korea



210mm X 297mm
보존용지(1종) 70g/m²

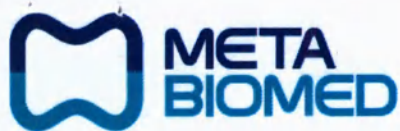


META BIOMED CO., LTD.

Osong factory): 270, Osongsaengmyeong1-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, Korea
Sales office): 4F Taeyang Bldg, 16, Gangnam-daero 95-gil, Seocho-gu,
Seoul, Republic of Korea
T) +82-2-6933-7521 F) +82-2-6933-7525
Email: cosmed@meta-biomed.com Home Page: www.meta-biomed.com

On letterhead of META BIOMED CO., LTD.

APPROVED BY
Chairman
Ok Suk Song

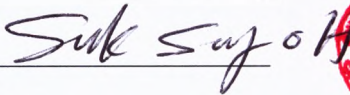


Date: 23.05.2022

Ver. 3.0

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга на
иглах-носителях или канюлях-носителях, окрашенная и неокрашенная,
варианты исполнения**



등부 2022년 제 11687호

Registered No. 2022-11687

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 위임장-----에
기재된 주식회사 메타바이오메드-----
대표이사 오석송-----

LEE YEUN SUK-----

attorney-in-fact of
META BIOMED CO., LTD.-----
President&CEO/ SUK SONG OH-----

의 대리인 이은숙-----은
본 공증인의 면전에서 위 본인이 ---
서명날인한 것임을 확인하였다.

appeared before me and admitted
said principal`s subscription to
the attached -----
POWER OF ATTORNEY.-----

2022년 05월 31일

이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this
31st day of May 2022 at this office.

공증
인가 법무법인 코러스

Law Firm CHORUS

서울중앙지방법검찰청

Seoul Central District Prosecutor's Office

서울 중구 무교로 15, 301호
(무교동, 남강빌딩)

15, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul, Korea

Ob 채소



Signature of the Notary Public

공증담당변호사

Signature of the Notary Public
Lim Chae Kwon

본 사무소는 인가번호 제68호에 의거하여
2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, Feb. 2020 Under Law No.68.

Наименование медицинского изделия:

Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга на иглах-носителях или канюлях-носителях, окрашенная и неокрашенная, варианты исполнения:

1. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Mono, варианты исполнения: M2160S-0090, M2338S-3050, M2350S-3080, M2360S-3090, M2390S-30150, M2538S-4050, M2550S-4080, M2560S-4090, M2590S-40150, M2638S-4050, M2650S-4080, M2660S-4090, M2690S-40150, M2638S-5050, M2650S-5080, M2660S-5090, M2690S-50150, M2660S-6090, M2725S-5030, M2732S-5050, M2738S-5050, M2750S-5080, M2760S-5090, M2790S-50150, M2732S-6050, M2738S-6050, M2925S-5030, M2925S-6030, M2938S-6050, M2950S-6080, M2960S-6090, M2990S-60150, M3025S-7030 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
2. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono» на игле-носителе, неокрашенная, тип Mono, варианты исполнения: M2160S-W0090, M2338S-W3050, M2350S-W3080, M2360S-W3090, M2390S-W30150, M2538S-W4050, M2550S-W4080, M2560S-W4090, M2590S-W40150, M2638S-W4050, M2650S-W4080, M2660S-W4090, M2690S-W40150, M2638S-W5050, M2650S-W5080, M2660S-W5090, M2690S-W50150, M2660S-W6090, M2725S-W5030, M2732S-W5050, M2738S-W5050, M2750S-W5080, M2760S-W5090, M2790S-W50150, M2732S-W6050, M2738S-W6050, M2925S-W5030, M2925S-W6030, M2938S-W6050, M2950S-W6080, M2960S-W6090, M2990S-W60150, M3025S-W7030 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
3. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono Screw» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Mono Screw, варианты исполнения: MS2338S-3050, MS2350S-3080, MS2360S-3090, MS2370S-30110, MS2390S-30150, MS2538S-4050, MS2550S-4080, MS2560S-4090, MS2570S-40110, MS2590S-40150, MS2538S-5050, MS2550S-5080, MS2560S-5090, MS2570S-50110, MS2590S-50150, MS2638S-4050, MS2650S-4080, MS2660S-4090, MS2670S-40110, MS2690S-40150, MS2638S-5050, MS2650S-5080, MS2660S-5090, MS2670S-50110, MS2690S-50150, MS2638S-6050, MS2650S-6080, MS2660S-6090, MS2670S-60110, MS2690S-60150, MS2738S-5050, MS2750S-5080, MS2760S-5090, MS2770S-50110, MS2790S-50150, MS2925S-5030, MS2930S-5040, MS2938S-5050, MS2950S-5080, MS2960S-5090, MS2925S-6030, MS2930S-6040, MS2938S-6050, MS2950S-6080, MS2960S-6090, MS3025S-7030, MS3030S-7040, MS3038S-7050 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
4. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono Screw» на игле-носителе, неокрашенная, тип Mono Screw, варианты исполнения: MS2338S-W3050, MS2350S-W3080, MS2360S-W3090, MS2370S-W30110, MS2390S-W30150, MS2538S-W4050, MS2550S-W4080, MS2560S-W4090, MS2570S-W40110, MS2590S-W40150, MS2538S-W5050, MS2550S-W5080, MS2560S-W5090, MS2570S-W50110, MS2590S-W50150, MS2638S-W4050, MS2650S-W4080, MS2660S-W4090, MS2670S-W40110, MS2690S-W40150, MS2638S-W5050, MS2650S-W5080, MS2660S-W5090, MS2670S-W50110, MS2690S-W50150, MS2638S-W6050, MS2650S-W6080, MS2660S-W6090, MS2670S-W60110, MS2690S-W60150, MS2738S-W5050, MS2750S-W5080, MS2760S-W5090, MS2770S-W50110, MS2790S-W50150, MS2925S-W5030,
5. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Double» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Double, варианты исполнения: D2538S-6050, D2550S-7080, D2638S-6050, D2638S-7050, D2650S-7080, D2660S-7090, D2690S-70150, D2738S-7050, D2750S-7080, D2760S-7090 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
6. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Double» на игле-носителе, неокрашенная, тип Double, варианты исполнения: D2538S-W6050, D2550S-W7080, D2638S-W6050, D2638S-W7050, D2650S-W7080, D2660S-W7090, D2690S-W70150, D2738S-W7050, D2750S-W7080, D2760S-W7090 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
7. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Double Screw» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Double Screw, варианты исполнения: DS2538S-5050, DS2550S-5080, DS2560S-5090, DS2570S-50110, DS2590S-50150, DS2538S-6050, DS2550S-6080, DS2560S-6090, DS2570S-60110, DS2590S-60150, DS2638S-5050, DS2650S-5080, DS2660S-5090, DS2570S-50110, DS2590S-50150, DS2638S-6050, DS2650S-6080, DS2660S-6090, DS2670S-60110, DS2690S-60150, DS2638S-7050, DS2650S-7070, DS2660S-7090, DS2690S-70150, DS2738S-6050, DS2750S-6080, DS2760S-6090, DS2760S-7090 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
8. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Double Screw» на игле-носителе, неокрашенная, тип Double Screw, варианты исполнения: DS2538S-W5050, DS2550S-W5080, DS2560S-W5090, DS2570S-W50110, DS2590S-W50150, DS2538S-W6050, DS2550S-W6080, DS2560S-W6090, DS2570S-W60110, DS2590S-W60150, DS2638S-W5050, DS2650S-W5080, DS2660S-W5090, DS2570S-W50110, DS2590S-W50150, DS2638S-W6050, DS2650S-W6080, DS2660S-W6090, DS2670S-W60110, DS2690S-W60150, DS2638S-W7050, DS2650S-W7070, DS2660S-W7090, DS2690S-W70150, DS2738S-W6050, DS2750S-W6080, DS2760S-W6090, DS2760S-W7090 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
9. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Triple» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Triple Screw, варианты исполнения: TS2538S-7050, TS2550S-7080, TS2560S-7090, TS2590S-70150 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
10. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Triple» на игле-носителе, неокрашенная, тип Triple Screw, варианты исполнения: TS2538S-W7050, TS2550S-W7080, TS2560S-W7090, TS2590S-W70150 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
11. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Braid,

MS2930S-W5040, MS2938S-W5050, MS2950S-W5080, MS2960S-W5090, MS2925S-W6030, MS2930S-W6040, MS2938S-W6050, MS2950S-W6080, MS2960S-W6090, MS3025S-W7030, MS3030S-W7040, MS3038S-W7050 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению

- варианты исполнения: 3B2138S-6050, 3B2150S-6080, 8B2138S-7050, 4B2338S-7050, 3B2560S-7080 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
12. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на игле-носителе, неокрашенная, тип Braid, варианты исполнения: 3B2138S-W6050, 3B2150S-W6080, 8B2138S-W7050, 4B2338S-W7050, 3B2560S-W7080 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 13. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono» на канюле-носителе типа L, окрашенная фиолетовым, тип L-Blunt Mono, варианты исполнения: M1938L-0050, M2338L-3050, M2360L-3090, M2390L-30150, M2725L-5030, M2738L-5050, M2750L-5080, M2760L-5090, M2725L-6030, M2738L-6050, M2925L-5030, M2938L-5050, M2950L-5080, M2960L-5090, M2925L-6030, M2938L-6050, M3025L-6030, M3038L-6050, M3025L-7030, M3038L-7050 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 14. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono» на канюле-носителе типа L, неокрашенная, тип L-Blunt Mono, варианты исполнения: M1938L-W0050, M2338L-W3050, M2360L-W3090, M2390L-W30150, M2725L-W5030, M2738L-W5050, M2750L-W5080, M2760L-W5090, M2725L-W6030, M2738L-W6050, M2925L-W5030, M2938L-W5050, M2950L-W5080, M2960L-W5090, M2925L-W6030, M2938L-W6050, M3025L-W6030, M3038L-W6050, M3025L-W7030, M3038L-W7050 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 15. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на канюле-носителе типа L, окрашенная фиолетовым, тип L-Blunt Multi B, варианты исполнения: 8B1938L-5035, 8B1938L-5050, 8B1938L-6050, 6B1938L-7050, 8B1950L-5080, 3B2138L-6050, 3B2160L-6080, 3B2160L-6090 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 16. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на канюле-носителе типа L, неокрашенная, тип L-Blunt Multi B, варианты исполнения: 8B1938L-W5035, 8B1938L-W5050, 8B1938L-W6050, 6B1938L-W7050, 8B1950L-W5080, 3B2138L-W6050, 3B2138L-W6080, 3B2160L-W6090 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 17. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на канюле-носителе типа L, окрашенная фиолетовым, тип L-Blunt Multi BM, варианты исполнения: 4BM1950L-4080, 8BM1950L-5080, 2BM2160L-7090, 2BM21100L-70160, 4BM2338L-5050, 6BM2338L-5050, 8BM2338L-5050 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 18. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на канюле-носителе типа L, неокрашенная, тип L-Blunt Multi BM, варианты исполнения: 4BM1950L-W4080, 8BM1950L-W5080, 2BM2160L-W7090, 2BM21100L-W70160, 4BM2338L-W5050, 6BM2338L-W5050, 8BM2338L-W5050 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 19. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на канюле-носителе типа L, окрашенная фиолетовым, тип L-Blunt Multi BB, варианты исполнения: 2BB2160L-7090, 2BB21100L-70160 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 20. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Braid» на канюле-носителе типа L, неокрашенная, тип L-Blunt Multi BB, варианты исполнения: 2BB2160L-W7090, 2BB21100L-W70160 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 21. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono» на канюле-носителе типа W, окрашенная фиолетовым, тип W-Blunt Mono, варианты исполнения: M2338W-3050, M2360W-3090, M2390W-30150 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 22. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Mono» на канюле-носителе типа W, неокрашенная, тип W-Blunt Mono, варианты исполнения: M2338W-W3050, M2360W-W3090, M2390W-W30150 – 20 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 23. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Cobra» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Cog A, варианты исполнения: AS1850-0010, AS1860-0011, AS1870-0012, AS1880-0013, AS1890-0014, AS18100-0015, AS1838-015, AS1850-017, AS18100-0115, AS1950-0010, AS1960-0011, AS1970-0012, AS1980-0013, AS1990-0014, AS19100-0015, AS19100-0017, AS19100-0020, AS1938-015, AS1950-017, AS19100-0115, AS19100-0117, AS19100-0120 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 24. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Cobra» на игле-носителе, неокрашенная, тип Cog A, варианты исполнения: AS1850-W0010, AS1860-W0011, AS1870-W0012, AS1880-W0013, AS1890-W0014, AS18100-W0015, AS1838-W015, AS1850-W017, AS18100-W0115, AS1950-W0010, AS1960-W0011, AS1970-W0012, AS1980-W0013, AS1990-W0014, AS19100-W0015, AS19100-W0017, AS19100-W0020, AS1938-W015, AS1950-W017, AS19100-W0115, AS19100-W0117, AS19100-W0120 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 25. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Cog» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Cog B, варианты исполнения: BS1850-0010, BS1860-0011, BS1870-0012, BS1880-0013, BS1890-0014, BS18100-0015, BS1838-015, BS1850-017, BS18100-0115, BS1838-025, BS1850-027, BS1950-0010, BS1960-0011, BS1970-0012, BS1980-0013, BS1990-0014, BS19100-0015, BS19100-0017, BS19100-0020, BS1938-015, BS1950-017, BS1938-025, BS1950-026, BS2160-2010, BS2160-2011, BS2170-2012, BS2180-2013, BS2190-2014, BS21100-2015, BS2350-307, BS2360-309, BS2360-3011, BS2370-3012, BS2380-3013, BS2390-3013, BS2390-3014 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
 26. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Cog» на игле-носителе, неокрашенная, тип Cog B, варианты исполнения: BS1850-W0010, BS1860-W0011, BS1870-W0012, BS1880-W0013, BS1890-W0014, BS18100-W0015, BS1838-W015, BS1850-W017, BS18100-W0115, BS1838-W025, BS1850-

- W027, BS1950-W0010, BS1960-W0011, BS1970-W0012, BS1980-W0013, BS1990-W0014, BS19100-W0015, BS19100-W0017, BS19100-W0020, BS1938-W015, BS1950-W017, BS1938-W025, BS1950-W026, BS2160-W2010, BS2160-W2011, BS2170-W2012, BS2180-W2013, BS2190-W2014, BS21100-W2015, BS2350-W307, BS2360-W309, BS2360-W3011, BS2370-W3012, BS2380-W3013, BS2390-W3013, BS2390-W3014 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
27. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Molding» на игле-носителе, окрашенная фиолетовым, тип Cog C, вариант исполнения: CS18100-3417 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
28. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Molding» на игле-носителе, неокрашенная, тип Cog C, вариант исполнения: CS18100-W3417 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
29. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Cobra» на канюле-носителе типа L, окрашенная фиолетовым, тип Cog L-Blunt A, варианты исполнения AL1850-0010, AL1860-0011, AL1870-0012, AL1880-0013, AL1890-0014, AL18100-0015, AL1838-015, AL1850-017, AL18100-0115, AL1950-0010, AL1960-0011, AL1970-0012, AL1980-0013, AL1990-0014, AL19100-0015, AL19100-0017, AL19100-0020, AL1938-015, AL1950-017, AL19100-0115, AL19100-0117, AL19100-0120 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
30. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Cobra» на канюле-носителе типа L, неокрашенная, тип Cog L-Blunt A, варианты исполнения AL1850-W0010, AL1860-W0011, AL1870-W0012, AL1880-W0013, AL1890-W0014, AL18100-W0015, AL1838-W015, AL1850-W017, AL18100-W0115, AL1950-W0010, AL1960-W0011, AL1970-W0012, AL1980-W0013, AL1990-W0014, AL19100-W0015, AL19100-W0017, AL19100-W0020, AL1938-W015, AL1950-W017, AL19100-W0115, AL19100-0117, AL19100-W0120 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
31. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Cog» на канюле-носителе типа L, окрашенная фиолетовым, тип Cog L-Blunt B, варианты исполнения BL1850-0010, BL1860-0011, BL1870-0012, BL1880-0013, BL1890-0014, BL18100-0015, BL1838-015, BL1850-017, BL18100-0115, BL1838-025, BL1850-027, BL1950-0010, BL1960-0011, BL1970-0012, BL1980-0013, BL1990-0014, BL19100-0015, BL19100-0017, BL19100-0020, BL1938-015, BL1950-017, BL1938-025, BL1950-026, BL2150-2010, BL2160-2011, BL2170-2012, BL2180-2013, BL2190-2014, BL21100-2015, BL2350-307, BL2360-309, BL2360-3011, BL2370-3012, BL2380-3013, BL2390-3013, BL2390-3014 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
32. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Cog» на канюле-носителе типа L, неокрашенная, тип Cog L-Blunt B, варианты исполнения BL1850-W0010, BL1860-W0011, BL1870-W0012, BL1880-W0013, BL1890-W0014, BL18100-W0015, BL1838-W015, BL1850-W017, BL18100-W0115, BL1838-W025, BL1850-W027, BL1950-W0010, BL1960-W0011, BL1970-W0012, BL1980-W0013, BL1990-W0014, BL19100-W0015, BL19100-W0017, BL1938-W015, BL1950-W017, BL1938-W025, BL1950-W026, BL2150-2010, BL2160-2011, BL2170-2012, BL2180-2013, BL2190-2014, BL21100-2015, BL2350-W307, BL2360-W309, BL2360-W3011, BL2370-W3012, BL2380-W3013, BL2390-W3013, BL2390-W3014 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
33. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Molding» на канюле-носителе типа L, окрашенная фиолетовым, тип Cog L-Blunt C, вариант исполнения CL18100-3417 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
34. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Molding» на канюле-носителе типа L, неокрашенная, тип Cog L-Blunt C, вариант исполнения CL18100-W3417 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
35. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Cobra» на канюле-носителе типа W, окрашенная фиолетовым, тип Cog W-Blunt A, варианты исполнения: AW1850-0010, AW1860-0011, AW1870-0012, AW1880-0013, AW1890-0014, AW18100-0015, AW1838-015, AW1850-017, AW18100-0115, AW1950-0010, AW1960-0011, AW1970-0012, AW1980-0013, AW1990-0014, AW19100-0015, AW19100-0017, AW19100-0020, AW1938-015, AW1950-017, AW19100-0115, AW19100-0117, AW19100-0120 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
36. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Cobra» на канюле-носителе типа W, неокрашенная, тип Cog W-Blunt A, варианты исполнения: AW1850-W0010, AW1860-W0011, AW1870-W0012, AW1880-W0013, AW1890-W0014, AW18100-W0015, AW1838-W015, AW1850-W017, AW18100-W0115, AW1950-W0010, AW1960-W0011, AW1970-W0012, AW1980-W0013, AW1990-W0014, AW19100-W0015, AW19100-W0017, AW19100-W0020, AW1938-W015, AW1950-W017, AW19100-W0115, AW19100-W0117, AW19100-W0120 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
37. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Cog» на канюле-носителе типа W, окрашенная фиолетовым, тип Cog W-Blunt B, варианты исполнения: BW1850-0010, BW1860-0011, BW1870-0012, BW1880-0013, BW1890-0014, BW18100-0015, BW1838-015, BW1850-017, BW18100-0115, BW1838-025, BW1850-027, BW1950-0010, BW1960-0011, BW1970-0012, BW1980-0013, BW1990-0014, BW19100-0015, BW19100-0017, BW19100-0020, BW1938-015, BW1950-017, BW1938-025, BW1950-026, BW2150-2010, BW2160-2011, BW2170-2012, BW2180-2013, BW2190-2014, BW21100-2015, BW2350-307, BW2360-309, BW2360-3011, BW2370-3012, BW2380-3013, BW2390-3013, BW2390-3014 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
38. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Cog» на канюле-носителе типа W, неокрашенная, тип Cog W-Blunt B, варианты исполнения: BW1850-W0010, BW1860-W0011, BW1870-W0012, BW1880-W0013, BW1890-W0014, BW18100-W0015, BW1838-W015, BW1850-W017, BW18100-W0115, BW1838-W025, BW1850-W027, BW1950-W0010, BW1960-W0011, BW1970-W0012, BW1980-W0013, BW1990-W0014, BW19100-W0015, BW19100-W0017, BW19100-W0020, BW1938-W015, BW1950-W017, BW19100-W0115, BW19100-W0117, BW19100-W0120 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению

- BW1960-W0011, BW1970-W0012, BW1980-W0013, BW1990-W0014, BW19100-W0015, BW19100-W0017, BW19100-W0020, BW1938-W015, BW1950-W017, BW1938-W025, BW1950-W026, BW2160-W2011, BW2170-W2012, BW2180-W2013, BW2190-W2014, BW21100-W2015, BW2350-W307, BW2360-W309, BW2360-W3011, BW2370-W3012, BW2380-W3013, BW2390-W3013, BW2390-W3014 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
39. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Molding» на канюле-носителе типа W, окрашенная фиолетовым, тип Cog W-Blunt C, вариант исполнения: CW18100-3417 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
40. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Premium Molding» на канюле-носителе типа W, неокрашенная, тип Cog W-Blunt C, вариант исполнения: CW18100-W3417 – 8 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
41. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами В-типа (колющими), окрашенная фиолетовым, тип Double Arm Cog A, варианты исполнения: AD11B00-92, AD11B00-172, AD16B00-172 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
42. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами В-типа (колющими), неокрашенная, тип Double Arm Cog A, варианты исполнения: AD11B00-W92, AD11B00-W172, AD16B00-W172 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
43. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами RC-типа (режущими), окрашенная фиолетовым, тип Double Arm Cog A, варианты исполнения: AD11S00-92, AD11S00-172, AD16S00-172 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
44. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами RC-типа (режущими), неокрашенная, тип Double Arm Cog A, варианты исполнения: AD11S00-W92, AD11S00-W172, AD16S00-W172 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
45. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами В-типа (колющими), окрашенная фиолетовым, тип Double Arm Cog C, вариант исполнения: CD11B34-43 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
46. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами В-типа (колющими), неокрашенная, тип Double Arm Cog C, вариант исполнения: CD11B34-W43 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
47. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами RC-типа (режущими), окрашенная фиолетовым, тип Double Arm Cog C, вариант исполнения: CD11S34-43 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
48. Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга «Da:all Spiral Double arm» с двумя атравматическими иглами RC-типа (режущими), неокрашенная, тип Double Arm Cog C, вариант исполнения: CD11S34-W43 – 1 шт./упак. в комплекте с инструкцией по применению
- Производитель медицинского изделия:**
Наименование: META BIOMED CO., LTD. (МЕТА БИОМЕД КО., ЛТД.)
Адрес: 270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA
тел. 043-230-9226
e-mail: bioinfo@meta-biomed.com
- По всем вопросам, связанным с обращением изделия в Российской Федерации, следует обращаться к уполномоченному представителю производителя:**
«Общество с ограниченной ответственностью «М-Технология» (ООО «М-Технология»)
Россия, 119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1
тел. +7 (495) 166-18-17
- Назначение медицинского изделия:** Медицинское изделие предназначено для лифтинга, имплантируется в субдермальную или подкожную ткань с целью фиксации субдермальной ткани в заданном положении: подтяжки кожи щёк, коррекции носогубных складок, уменьшения дряблости кожи шеи, линии декольте, ягодиц, живота, реконструкции мягких тканей при асимметричности, или фиксации подкожной ткани в пластической и реконструктивной хирургии при необходимости фиксации подкожной клетчатки в приподнятом положении или при дисморфобии. Данное медицинское изделие применяется в области пластической и реконструктивной хирургии и косметологии.
- Предусмотренные пользователи:** Изделие используется для пациентов подросткового возраста и взрослых пациентов всех возрастов. Нет данных об использовании у младенцев и беременных женщин.
К применению настоящего изделия допускается квалифицированный медицинский персонал, обладающий соответствующими знаниями и навыками.
- Область применения:** пластическая хирургия, реконструктивная хирургия, косметология.
- Медицинское изделие используется в условиях лечебно-профилактических учреждений и косметологических центров.**
- Показания к применению:**
- Профилактика возрастных изменений.
 - Опушение или нависание бровей (возрастные изменения верхней трети)
 - Возрастное снижение упругости тканей средней и нижней трети.
 - Искажение овала лица, возникновение второго подбородка (гравитационный птоз I степени).
 - Возрастные изменения шеи.
 - Возрастные изменения кожи тела.
 - Перепады рельефа кожи и подкожных тканей.
 - Асимметрия лица
 - Необходимость фиксации подкожной клетчатки в приподнятом положении;
 - Телесное дисформическое расстройство (дисморфобия).
- Противопоказания к применению:**
- Беременность и период лактации.
 - Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.
 - Склонность к образованию келоидных рубцов.

- Поливалентная аллергия.
- Неотложные состояния.
- Аутоиммунные заболевания.
- Острые или обострение хронических инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп, герпес и др.).
- Воспаление кожи в области предполагаемой нитевой имплантации, кожные заболевания в период обострения.
- Заболевания крови (лейкозы, анемии).
- Заболевания связанные с нарушением свертываемости крови.
- Коллагенозы.
- Ранее введенные небиодеградирующие инъекционные имплантаты в зоне проведения процедуры.
- Сахарный диабет (относительное противопоказание-при нормализации показателей сахара крови-можно проводить процедуру).
- Онкологическое заболевания.
- Новообразования в месте планируемой имплантации.
- Сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации.
- Части, оказывающие долгосрочное давление на суставы (более 6 недель), отсутствуют. Изделие, не обладающее характерными рассасывающими свойствами, не используется для фиксации протезов (например, сердечных клапанов или искусственных трансплантатов).
- Другие противопоказания по рекомендациям лечащего врача.

Побочные действия:

Внимание! При обнаружении побочного действия необходимо прекратить использование медицинского изделия.

Побочным действием может быть воспалительная реакция на инородное тело.

Меры предосторожности:

- Данное медицинское изделие может использоваться только хирургом.

- Не использовать медицинское изделие после истечения срока годности.
- Не использовать медицинское изделие, если упаковка повреждена.
- Использовать данное медицинское изделие только по назначению.
- Данное медицинское изделие может использоваться только медицинским персоналом, хирургом.
- Медицинское изделие не должно использоваться, если в месте лечения обнаружено воспаление или бактериальные инфекции.
- Поскольку это рассасывающаяся нить, хирурги должны учитывать, используются ли дополнительно нерассасывающиеся нити для дополнительной поддержки, для закрытия раскрытой или растянутой структуры, потребуется ли дополнительная поддержка или нет, и принимать решение о применении данного медицинского изделия, исходя из клинической картины.
- За неделю до операции пациенту необходимо прекратить прием антикоагулянтов (например, аспирина, варфарина, усилителя кровообращения и тромболитиков) под наблюдением врача.
- В течение недели до и после операции пациенту нельзя употреблять табачные изделия и алкоголь.
- При простудных заболеваниях или высокой температуре у пациента необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о возможности применения медицинского изделия.

Рекомендации по извлечению нити:

Нить рекомендуется извлекать сразу после обнаружения и в случаях следующих событий или патологических состояний:

- Инфекционно-воспалительная реакция в зоне введения и/или «по ходу» нити;
- неверная «установка» нити, повлекшая «неровности» на поверхности кожи/нарушение мимики/ стойкое нарушение контура/ контурирование нити;
- миграция нитей;
- срыв нитей типа ког.

Техническое описание и технические характеристики

Данное изделие предназначено для лифтинга, имплантируется в субдермальную или подкожную ткань с целью фиксации субдермальной ткани в заданном положении: подтяжки кожи щёк, коррекции носогубных складок, уменьшения дряблости кожи шеи, линии декольте, ягодиц, живота, реконструкции мягких тканей при асимметричности, а также для фиксации подкожной ткани в пластической и реконструктивной хирургии при необходимости фиксации подкожной клетчатки в приподнятом положении или при дисморфофобии. Данное медицинское изделие применяется в области пластической и реконструктивной хирургии и косметологии.

Медицинское изделие включает в себя носитель (иглу/канюлю), колпачок иглы, спонж-фиксатор/силиконовую трубку (в зависимости от варианта исполнения) и полидиоксаноновую (ПДО) нить и стерилизуется газом ЭО. Безопасность и эффективность полидиоксаноновой (ПДО) продемонстрирована. Данный полидиоксаноновый (ПДО) материал является рассасывающимся и уже используется в клинической практике с 2001 года, носители (иглы/канюли) также используются в клинической практике. Материалы изготовления, используемые в этом изделии, также использовались во многих медицинских изделиях, таких как шприцы и другие одноразовые медицинские изделия.

Полидиоксаноновый шовный материал вводится в мягкие ткани с помощью носителя (иглы или канюли в зависимости от варианта исполнения), а после извлечения носителя в мягких тканях остается только нить. Когда носитель извлекается из мягких тканей, нить не выходит вместе с носителем.

Чтобы обеспечить и повысить эффективность, были разработаны несколько типов самоудерживающихся шовных материалов с носителем – тип Cog A, тип Cog B, тип Cog C. Таким образом, ткани плотно соединяются, и эффективность нитей для лифтинга становится выше.

С помощью канюли нить с «завуринами» могут быть введена в мягкие ткани с небольшим повреждением ткани.

Время полного рассасывания нити составляет 182 дня (для всех вариантов исполнения медицинского изделия)

а рисунке 1 представлено схематичное изображение медицинского изделия вариантов исполнения без зубчатой поверхности. Технические и функциональные характеристики медицинского изделия вариантов исполнения без зубчатой поверхности представлены в Таблице 1. При этом габаритные размеры приведены с погрешностью $\pm 5\%$, если не указано иное.

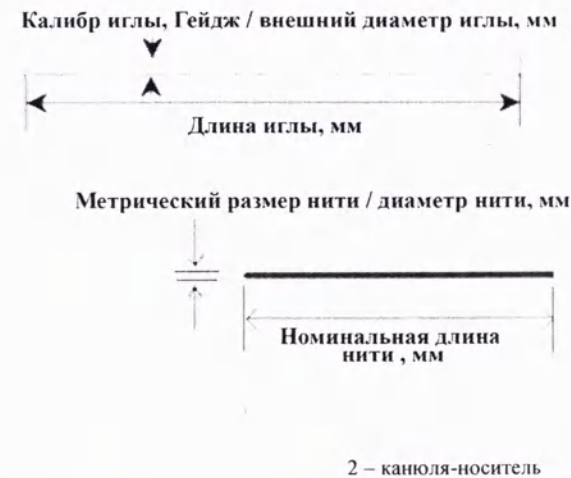
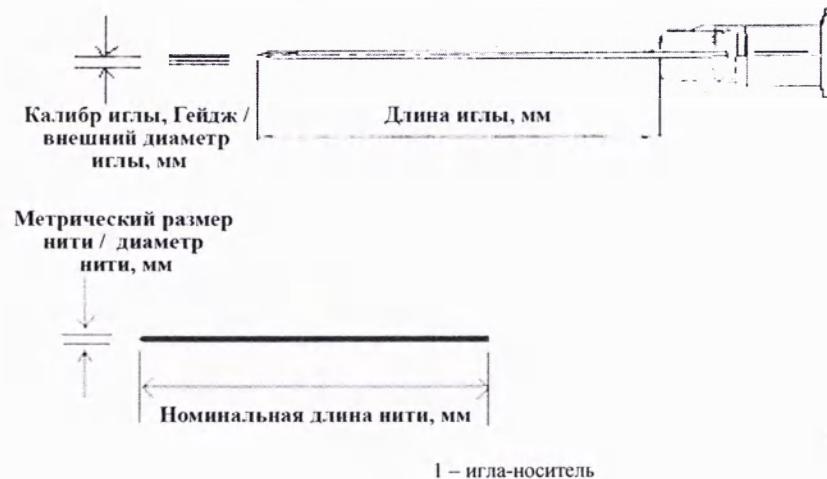


Рис. 1. Схематичное изображение вариантов исполнения без зубчатой поверхности

Таблица 1. Технические и функциональные характеристики вариантов исполнения без зубчатой поверхности¹

¹ - Примечание: габаритные размеры (длина и диаметр нити и иглы) приводятся с погрешностью $\pm 5\%$

№	Вариант исполнения	Тип нити / тип и кол-во игл	Цвет нити	Размеры иглы		Размеры нити ²	
				Калибр, Гейдж / внешний диаметр, мм	Длина, мм	Метрический размер ³ / диаметр нити, мм	Номинальная длина нити ⁴ , мм
1.	M2160S-0090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60	4 / (0,400 – 0,499)	90
2.	M2338S-3050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50
3.	M2350S-3080	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	50	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	80
4.	M2360S-3090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
5.	M2390S-30150	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150
6.	M2538S-4050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
7.	M2550S-4080	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
8.	M2560S-4090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
9.	M2590S-40150	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150
10.	M2638S-4050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
11.	M2650S-4080	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
12.	M2660S-4090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
13.	M2690S-40150	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150
14.	M2638S-5050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
15.	M2650S-5080	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
16.	M2660S-5090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
17.	M2690S-50150	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
18.	M2660S-6090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90

² - Примечание: обозначения «xN», означает, что в конструкции данного варианта исполнения используются N шт. одинаковых нитей соответственно

³ - Примечание: для каждого варианта исполнения задается возможный диапазон диаметра нити. В случае, если возможные значения соответствуют более, чем одному метрическому размеру, указываются оба метрических размера, которым может соответствовать диапазон диаметра нити (например, 2,5; 3). Учитывая, что для каждого значения метрического размера установлено однозначное соответствие значения разрывной нагрузки в простом узле, усилия отрыва от иглы, при испытаниях таких вариантов исполнения следует учитывать возможный наихудший случай.

⁴ - Примечание: фактическая длина нити должна составлять не менее 98% от номинальной

19.	M2725S-5030	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
20.	M2732S-5050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	32	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
21.	M2738S-5050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
22.	M2750S-5080	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
23.	M2760S-5090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
24.	M2790S-50150	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
25.	M2732S-6050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	32	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
26.	M2738S-6050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
27.	M2925S-5030	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
28.	M2925S-6030	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
29.	M2938S-6050	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
30.	M2950S-6080	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	80
31.	M2960S-6090	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90
32.	M2990S-60150	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	150
33.	M3025S-7030	Моно / 1 игла-носитель	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	25	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	30
34.	M2160S-W0090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60	4 / (0,400 – 0,499)	90
35.	M2338S-W3050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50
36.	M2350S-W3080	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	50	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	80
37.	M2360S-W3090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
38.	M2390S-W30150	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150
39.	M2538S-W4050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
40.	M2550S-W4080	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
41.	M2560S-W4090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
42.	M2590S-W40150	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150

43.	M2638S-W4050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
44.	M2650S-W4080	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
45.	M2660S-W4090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
46.	M2690S-W40150	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150
47.	M2638S-W5050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
48.	M2650S-W5080	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
49.	M2660S-W5090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
50.	M2690S-W50150	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
51.	M2660S-W6090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90
52.	M2725S-W5030	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
53.	M2732S-W5050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	32	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
54.	M2738S-W5050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
55.	M2750S-W5080	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
56.	M2760S-W5090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
57.	M2790S-W50150	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
58.	M2732S-W6050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	32	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
59.	M2738S-W6050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G (0,400 – 0,420)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
60.	M2925S-W5030	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G (0,324 – 0,351)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
61.	M2925S-W6030	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G (0,324 – 0,351)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
62.	M2938S-W6050	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G (0,324 – 0,351)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
63.	M2950S-W6080	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G (0,324 – 0,351)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	80
64.	M2960S-W6090	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G (0,324 – 0,351)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90
65.	M2990S-W60150	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G (0,324 – 0,351)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	150
66.	M3025S-W7030	Моно / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	30G (0,298 – 0,320)	25	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	30

67.	MS2338S-3050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50
68.	MS2350S-3080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	50	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	80
69.	MS2360S-3090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
70.	MS2370S-30110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	70	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	100
71.	MS2390S-30150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150
72.	MS2538S-4050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
73.	MS2550S-4080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
74.	MS2560S-4090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
75.	MS2570S-40110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	70	2 / (0,200 – 0,249)	100
76.	MS2590S-40150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150
77.	MS2538S-5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
78.	MS2550S-5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
79.	MS2560S-5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
80.	MS2570S-50110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	70	1,5 / (0,150 – 0,199)	100
81.	MS2590S-50150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
82.	MS2638S-4050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
83.	MS2650S-4080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
84.	MS2660S-4090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
85.	MS2670S-40110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	70	2 / (0,200 – 0,249)	100
86.	MS2690S-40150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150
87.	MS2638S-5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
88.	MS2650S-5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
89.	MS2660S-5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
90.	MS2670S-50110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	70	1,5 / (0,150 – 0,199)	100

91.	MS2690S-50150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
92.	MS2638S-6050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
93.	MS2650S-6080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	80
94.	MS2660S-6090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90
95.	MS2670S-60110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	70	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	100
96.	MS2690S-60150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	150
97.	MS2738S-5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
98.	MS2750S-5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	40
99.	MS2760S-5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
100.	MS2770S-50110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	70	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
101.	MS2790S-50150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
102.	MS2925S-5030	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
103.	MS2930S-5040	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	30	1,5 / (0,150 – 0,199)	40
104.	MS2938S-5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
105.	MS2950S-5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
106.	MS2960S-5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
107.	MS2925S-6030	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
108.	MS2930S-6040	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	30	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	40
109.	MS2938S-6050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
110.	MS2950S-6080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	80
111.	MS2960S-6090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90
112.	MS3025S-7030	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	25	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	30
113.	MS3030S-7040	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	30	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	40
114.	MS3038S-7050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	50

115.	MS2338S-W3050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50
116.	MS2350S-W3080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	50	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	80
117.	MS2360S-W3090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
118.	MS2370S-W30110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	70	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	100
119.	MS2390S-W30150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150
120.	MS2538S-W4050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
121.	MS2550S-W4080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
122.	MS2560S-W4090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
123.	MS2570S-W40110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	70	2 / (0,200 – 0,249)	100
124.	MS2590S-W40150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150
125.	MS2538S-W5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
126.	MS2550S-W5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
127.	MS2560S-W5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
128.	MS2570S-W50110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	70	1,5 / (0,150 – 0,199)	100
129.	MS2590S-W50150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
130.	MS2638S-W4050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	2 / (0,200 – 0,249)	50
131.	MS2650S-W4080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	2 / (0,200 – 0,249)	80
132.	MS2660S-W4090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	2 / (0,200 – 0,249)	90
133.	MS2670S-W40110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	70	2 / (0,200 – 0,249)	100
134.	MS2690S-W40150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	2 / (0,200 – 0,249)	150
135.	MS2638S-W5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
136.	MS2650S-W5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
137.	MS2660S-W5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
138.	MS2670S-W50110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	70	1,5 / (0,150 – 0,199)	100

139.	MS2690S-W50150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	150
140.	MS2638S-W6050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
141.	MS2650S-W6080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	80
142.	MS2660S-W6090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90
143.	MS2670S-W60110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	70	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	100
144.	MS2690S-W60150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	150
145.	MS2738S-W5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
146.	MS2750S-W5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	40
147.	MS2760S-W5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
148.	MS2770S-W50110	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	70	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
149.	MS2790S-W50150	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	90	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
150.	MS2925S-W5030	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
151.	MS2930S-W5040	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	30	1,5 / (0,150 – 0,199)	40
152.	MS2938S-W5050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
153.	MS2950S-W5080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
154.	MS2960S-W5090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
155.	MS2925S-W6030	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
156.	MS2930S-W6040	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	30	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	40
157.	MS2938S-W6050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
158.	MS2950S-W6080	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	80
159.	MS2960S-W6090	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	90
160.	MS3025S-W7030	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	30G / (0,298 – 0,320)	25	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	30
161.	MS3030S-W7040	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	30G / (0,298 – 0,320)	30	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	40
162.	MS3038S-W7050	Mono Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	30G / (0,298 – 0,320)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	50

163.	D2538S-6050	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
164.	D2550S-7080	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	80 x2
165.	D2638S-6050	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
166.	D2638S-7050	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	50 x2
167.	D2650S-7080	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	80 x2
168.	D2660S-7090	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2
169.	D2690S-70150	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	150 x2
170.	D2738S-7050	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	50 x2
171.	D2750S-7080	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	80 x2
172.	D2760S-7090	Double / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2
173.	D2538S-W6050	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
174.	D2550S-W7080	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	80 x2
175.	D2638S-W6050	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
176.	D2638S-W7050	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	50 x2
177.	D2650S-W7080	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	80 x2
178.	D2660S-W7090	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2
179.	D2690S-W70150	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	150 x2
180.	D2738S-W7050	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	50 x2
181.	D2750S-W7080	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	80 x2
182.	D2760S-W7090	Double / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2
183.	DS2538S-5050	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	50 x2
184.	DS2550S-5080	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	80 x2
185.	DS2560S-5090	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	60	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	90 x2
186.	DS2570S-50110	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	70	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	110 x2

187.	DS2590S-50150	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	90	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	150 x2
188.	DS2538S-6050	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
189.	DS2550S-6080	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	80 x2
190.	DS2560S-6090	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	90 x2
191.	DS2570S-60110	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	70	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	110 x2
192.	DS2590S-60150	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	150 x2
193.	DS2638S-5050	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	50 x2
194.	DS2650S-5080	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	80 x2
195.	DS2660S-5090	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	90 x2
196.	DS2570S-50110	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	70	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	110 x2
197.	DS2590S-50150	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	150 x2
198.	DS2638S-6050	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
199.	DS2650S-6080	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	80 x2
200.	DS2660S-6090	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	90 x2
201.	DS2670S-60110	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	70	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	110 x2
202.	DS2690S-60150	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	150 x2
203.	DS2638S-7050	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	50 x2
204.	DS2650S-7070	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	70 x2
205.	DS2660S-7090	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2
206.	DS2690S-70150	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	150 x2
207.	DS2738S-6050	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
208.	DS2750S-6080	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	80 x2
209.	DS2760S-6090	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	90 x2
210.	DS2760S-7090	Double Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	70	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2

211.	DS2538S-W5050	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	50 x2
212.	DS2550S-W5080	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	80 x2
213.	DS2560S-W5090	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	60	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	90 x2
214.	DS2570S-W50110	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	70	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	110 x2
215.	DS2590S-W50150	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	90	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	150 x2
216.	DS2538S-W6050	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
217.	DS2550S-W6080	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	80 x2
218.	DS2560S-W6090	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	90 x2
219.	DS2570S-W60110	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	70	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	110 x2
220.	DS2590S-W60150	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	150 x2
221.	DS2638S-W5050	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	50 x2
222.	DS2650S-W5080	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	80 x2
223.	DS2660S-W5090	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	90 x2
224.	DS2570S-W50110	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	70	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	110 x2
225.	DS2590S-W50150	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	1,5 / (0,150 – 0,199) x2	150 x2
226.	DS2638S-W6050	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
227.	DS2650S-W6080	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	80 x2
228.	DS2660S-W6090	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	90 x2
229.	DS2670S-W60110	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	70	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	110 x2
230.	DS2690S-W60150	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	150 x2
231.	DS2638S-W7050	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	50 x2
232.	DS2650S-W7070	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	70 x2
233.	DS2660S-W7090	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2
234.	DS2690S-W70150	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	26G / (0,440 – 0,470)	90	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	150 x2

235.	DS2738S-W6050	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	50 x2
236.	DS2750S-W6080	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	80 x2
237.	DS2760S-W6090	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x2	90 x2
238.	DS2760S-W7090	Double Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	70	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x2	90 x2
239.	TS2538S-7050	Triple Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	50 x3
240.	TS2550S-7080	Triple Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	80 x3
241.	TS2560S-7090	Triple Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	90 x3
242.	TS2590S-70150	Triple Screw / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	90	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	150 x3
243.	TS2538S-W7050	Triple Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	50 x3
244.	TS2550S-W7080	Triple Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	50	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	80 x3
245.	TS2560S-W7090	Triple Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	90 x3
246.	TS2590S-W70150	Triple Screw / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	90	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	150 x3
247.	8B2060S-7080	Braid / 1 игла-носитель	Фиолетовый	20G / (0,860 – 0,920)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x8	80 x8
248.	8B2038S-6050	Braid / 1 игла-носитель	Фиолетовый	20G / (0,860 – 0,920)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x8	50 x8
249.	3B2138S-6050	Braid / 1 игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	50 x3
250.	3B2150S-6080	Braid / 1 игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	80 x3
251.	8B2138S-7050	Braid / 1 игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x8	50 x8
252.	4B2338S-7050	Braid / 1 игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x4	50 x4
253.	3B2560S-7080	Braid / 1 игла-носитель	Фиолетовый	25G / (0,500 – 0,530)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	80 x3
254.	8B2060S-W7080	Braid / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	20G / (0,860 – 0,920)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x8	80 x8
255.	8B2038S-W6050	Braid / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	20G / (0,860 – 0,920)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x8	50 x8
256.	3B2138S-W6050	Braid / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	50 x3
257.	3B2150S-W6080	Braid / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	50	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	80 x3
258.	8B2138S-W7050	Braid / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x8	50 x8

259.	4B2338S-W7050	Braid / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x4	50 x4
260.	3B2560S-W7080	Braid / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	25G / (0,500 – 0,530)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x3	80 x3
261.	M1938L-0050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38	4 / (0,400 – 0,499)	50
262.	M2338L-3050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50
263.	M2360L-3090	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
264.	M2390L-30150	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150
265.	M2725L-5030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
266.	M2738L-5050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
267.	M2750L-5080	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
268.	M2760L-5090	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
269.	M2725L-6030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
270.	M2738L-6050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	27G / (0,400 – 0,420)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
271.	M2860L-5090	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	28G / (0,349 – 0,370)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
272.	M2925L-5030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
273.	M2938L-5050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
274.	M2950L-5080	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
275.	M2960L-5090	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90

276.	M2925L-6030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
277.	M2938L-6050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	29G / (0,324 – 0,351)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
278.	M3025L-6030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
279.	M3038L-6050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
280.	M3025L-7030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	25	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	30
281.	M3038L-7050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	30G / (0,298 – 0,320)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	50
282.	M1938L-W0050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1.030 – 1.100)	38	4 / (0,400 – 0,499)	50
283.	M2338L-W3050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50
284.	M2360L-W3090	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
285.	M2390L-W30150	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150
286.	M2725L-W5030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
287.	M2738L-W5050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
288.	M2750L-W5080	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
289.	M2760L-W5090	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
290.	M2725L-W6030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
291.	M2738L-W6050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	27G / (0,400 – 0,420)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50

292.	M2925L-W5030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	25	1,5 / (0,150 – 0,199)	30
293.	M2938L-W5050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	38	1,5 / (0,150 – 0,199)	50
294.	M2950L-W5080	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	50	1,5 / (0,150 – 0,199)	80
295.	M2960L-W5090	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	60	1,5 / (0,150 – 0,199)	90
296.	M2925L-W6030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
297.	M2938L-W6050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	29G / (0,324 – 0,351)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
298.	M3025L-W6030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	30G / (0,298 – 0,320)	25	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	30
299.	M3038L-W6050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	30G / (0,298 – 0,320)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149)	50
300.	M3025L-W7030	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	30G / (0,298 – 0,320)	25	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	30
301.	M3038L-W7050	L-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	30G / (0,298 – 0,320)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094)	50
302.	8B1938L-5035	L-Blunt Multi B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	35 x8
303.	8B1938L-5050	L-Blunt Multi B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	50 x8
304.	8B1938L-6050	L-Blunt Multi B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x8	50 x8
305.	6B1938L-7050	L-Blunt Multi B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x16	50 x16
306.	8B1950L-5080	L-Blunt Multi B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	80 x8
307.	3B2138L-6050	L-Blunt Multi B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	50 x3

308.	3B2160L-6080	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	80 x3
309.	3B2160L-6090	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	90 x3
310.	8B1938L-W5035	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	38 x8
311.	8B1938L-W5050	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	50 x8
312.	8B1938L-W6050	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x8	50 x8
313.	6B1938L-W7050	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x16	50 x16
314.	8B1950L-W5080	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	80 x8
315.	3B2138L-W6050	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	38	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	50 x3
316.	3B2138L-W6080	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	80 x3
317.	3B2160L-W6090	L-Blunt Multi B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,7; 1 / (0,095 – 0,149) x3	90 x3
318.	4BM1950L-4080	L-Blunt Multi BM / I канюля- носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50	2 / (0,200 – 0,249) x4	80 x4
319.	8BM1950L-5080	L-Blunt Multi BM / I канюля- носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	80 x8
320.	2BM2160L-7090	L-Blunt Multi BM / I канюля- носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	90 x12
321.	2BM21100L-70160	L-Blunt Multi BM / I канюля- носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	100	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	160 x12
322.	4BM2338L-5050	L-Blunt Multi BM / I канюля- носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x4	50 x4
323.	6BM2338L-5050	L-Blunt Multi BM / I канюля- носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x6	50 x6

324.	8BM2338L-W5050	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	50 x8
325.	4BM1950L-W4080	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50	2 / (0,200 – 0,249) x4	80 x4
326.	8BM1950L-W5080	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	80 x8
327.	2BM2160L-W7090	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	90 x12
328.	2BM21100L-W70160	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	100	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	160 x12
329.	4BM2338L-W5050	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x4	50 x4
330.	6BM2338L-W5050	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x6	50 x6
331.	8BM2338L-W5050	L-Blunt Multi BM / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	1,5 / (0,150 – 0,199) x8	50 x8
332.	2BB2160L-7090	L-Blunt Multi BB / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	90 x12
333.	2BB21100L-70160	L-Blunt Multi BB / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	100	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	160 x12
334.	2BB2160L-W7090	L-Blunt Multi BB / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	90 x12
335.	2BB21100L-W70160	L-Blunt Multi BB / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	100	0,5; 0,7 / (0,050 – 0,094) x12	160 x12
336.	M2338W-3050	W-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50
337.	M2360W-3090	W-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
338.	M2390W-30150	W-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150
339.	M2338W-W3050	W-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	38	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	50

340.	M2360W-W3090	W-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90
341.	M2390W-W30150	W-Blunt Mono / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	150

На рисунке 2 представлено схематичное изображение медицинского изделия вариантов исполнения с зубчатой поверхностью, кроме вариантов исполнения AD11B00-92, AD11B00-172, AD16B00-172, AD11S00-92, AD11S00-172, AD16S00-172, AD11B00-W92, AD11B00-W172, AD16B00-W172, AD11S00-W92, AD11S00-W172, AD16S00-W172, CD11B34-43, CD11S34-43, CD11B34-W43, CD11S34-W43. Технические и функциональные характеристики медицинского изделия вариантов исполнения с зубчатой поверхностью, кроме вариантов исполнения AD11B00-92, AD11B00-172, AD16B00-172, AD11S00-92, AD11S00-172, AD16S00-172, AD11B00-W92, AD11B00-W172, AD16B00-W172, AD11S00-W92, AD11S00-W172, AD16S00-W172, CD11B34-43, CD11S34-43, CD11B34-W43, CD11S34-W43, представлены в Таблице 2. При этом габаритные размеры приведены с погрешностью $\pm 5\%$, если не указано иное.

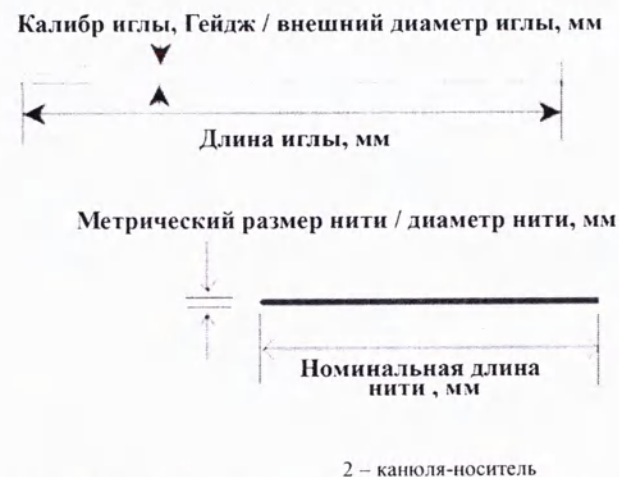
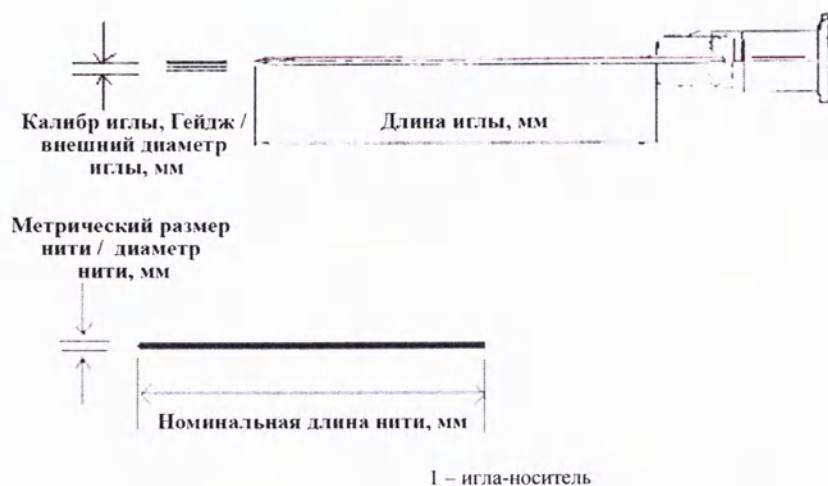


Рис. 2. Схематичное изображение медицинского изделия вариантов исполнения с зубчатой поверхностью

Таблица 2. Технические и функциональные характеристики медицинского изделия вариантов исполнения с зубчатой поверхностью⁵

№	Вариант исполнения	Цвет нити	Размеры иглы	Размеры нити
---	--------------------	-----------	--------------	--------------

⁵ - Примечание: габаритные размеры (длина и диаметр нити и иглы) приводятся с погрешностью $\pm 5\%$

<i>и</i>		<i>Калибр, Гейдж / внешний диаметр, мм</i>	<i>Длина, мм</i>	<i>Метрический размер⁶ / диаметр нити, мм</i>	<i>Номинальная длина нити⁷ / номинальная длина зубчатой поверхности⁸, мм</i>
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 90
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 90
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25

19.	AS1950-017	Cog A / I игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
20.	AS19100-0115	Cog A / I игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
21.	AS19100-0117	Cog A / I игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	170 / 90
22.	AS19100-0120	Cog A / I игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	200 / 90
23.	AS1850-W0010	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
24.	AS1860-W0011	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
25.	AS1870-W0012	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
26.	AS1880-W0013	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
27.	AS1890-W0014	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
28.	AS18100-W0015	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
29.	AS1838-W015	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
30.	AS1850-W017	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
31.	AS18100-W0115	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
32.	AS1950-W0010	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
33.	AS1960-W0011	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
34.	AS1970-W0012	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
35.	AS1980-W0013	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
36.	AS1990-W0014	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
37.	AS19100-W0015	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 90
38.	AS19100-W0017	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 90
39.	AS19100-W0020	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
40.	AS1938-W015	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
41.	AS1950-W017	Cog A / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35

42.	AS19100-W0115	Cog A / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
43.	AS19100-W0117	Cog A / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	170 / 90
44.	AS19100-W0120	Cog A / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	200 / 90
45.	BS1850-0010	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
46.	BS1860-0011	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
47.	BS1870-0012	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
48.	BS1880-0013	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
49.	BS1890-0014	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
50.	BS18100-0015	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
51.	BS1838-015	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
52.	BS1850-017	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
53.	BS18100-0115	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 100
54.	BS1838-025	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
55.	BS1850-027	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	70 / 35
56.	BS1950-0010	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
57.	BS1960-0011	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
58.	BS1970-0012	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
59.	BS1980-0013	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
60.	BS1990-0014	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
61.	BS19100-0015	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
62.	BS19100-0017	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 100
63.	BS19100-0020	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
64.	BS1938-015	Cog B / 1 игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25

65.	BS1950-017	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
66.	BS1938-025	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
67.	BS1950-026	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	60 / 30
68.	BS2160-2010	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	100 / 50
69.	BS2160-2011	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	110 / 60
70.	BS2170-2012	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	70 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	120 / 70
71.	BS2180-2013	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	80 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	130 / 80
72.	BS2190-2014	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	90 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	140 / 90
73.	BS21100-2015	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	100 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	150 / 100
74.	BS2350-307	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	50 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	70 / 35
75.	BS2360-309	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90 / 40
76.	BS2360-3011	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	110 / 60
77.	BS2370-3012	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	70 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	120 / 70
78.	BS2380-3013	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	80 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 80
79.	BS2390-3013	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 60
80.	BS2390-3014	Cog B / I игла-носитель	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	140 / 90
81.	BS1850-W0010	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
82.	BS1860-W0011	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
83.	BS1870-W0012	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
84.	BS1880-W0013	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
85.	BS1890-W0014	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
86.	BS18100-W0015	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
87.	BS1838-W015	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25

88.	BS1850-W017	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
89.	BS18100-W0115	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 100
90.	BS1838-W025	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
91.	BS1850-W027	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	70 / 35
92.	BS1950-W0010	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
93.	BS1960-W0011	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
94.	BS1970-W0012	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
95.	BS1980-W0013	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
96.	BS1990-W0014	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
97.	BS19100-W0015	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
98.	BS19100-W0017	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 100
99.	BS19100-W0020	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
100.	BS1938-W015	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
101.	BS1950-W017	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
102.	BS1938-W025	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
103.	BS1950-W026	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	60 / 30
104.	BS2160-W2010	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	100 / 50
105.	BS2160-W2011	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	110 / 60
106.	BS2170-W2012	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	70 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	120 / 70
107.	BS2180-W2013	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	80 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	130 / 80
108.	BS2190-W2014	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	90 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	140 / 90
109.	BS21100-W2015	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	100 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	150 / 100
110.	BS2350-W307	Cog B / 1 игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	50 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	70 / 35

111.	BS2360-W309	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90 / 40
112.	BS2360-W3011	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	110 / 60
113.	BS2370-W3012	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	70 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	120 / 70
114.	BS2380-W3013	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	80 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 80
115.	BS2390-W3013	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 60
116.	BS2390-W3014	Cog B / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	140 / 90
117.	CS18100-3417	Cog C / I игла-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	6 / (0,630 – 0,670)	170 / 37 [45]
118.	CS18100-W3417	Cog C / I игла-носитель	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	6 / (0,630 – 0,670)	170 / 37 [45]
119.	AW1850-0010	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
120.	AW1860-0011	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
121.	AW1870-0012	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
122.	AW1880-0013	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
123.	AW1890-0014	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
124.	AW18100-0015	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
125.	AW1838-015	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
126.	AW1850-017	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
127.	AW18100-0115	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
128.	AW1950-0010	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50

129.	AW1960-0011	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
130.	AW1970-0012	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
131.	AW1980-0013	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
132.	AW1990-0014	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
133.	AW19100-0015	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 90
134.	AW19100-0017	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 90
135.	AW19100-0020	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
136.	AW1938-015	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
137.	AW1950-017	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
138.	AW19100-0115	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
139.	AW19100-0117	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	170 / 90
140.	AW19100-0120	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	200 / 90
141.	AW1850-W0010	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
142.	AW1860-W0011	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
143.	AW1870-W0012	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
144.	AW1880-W0013	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80

145.	AW1890-W0014	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
146.	AW18100-W0015	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
147.	AW1838-W015	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
148.	AW1850-W017	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
149.	AW18100-W0115	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
150.	AW1950-W0010	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
151.	AW1960-W0011	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
152.	AW1970-W0012	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
153.	AW1980-W0013	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
154.	AW1990-W0014	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
155.	AW19100-W0015	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 90
156.	AW19100-W0017	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 90
157.	AW19100-W0020	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
158.	AW1938-W015	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
159.	AW1950-W017	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
160.	AW19100-W0115	Cog W-Blunt A / I канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90

161.	AW19100-W0117	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	170 / 90
162.	AW19100-W0120	Cog W-Blunt A / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	200 / 90
163.	BW1850-0010	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
164.	BW1860-0011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
165.	BW1870-0012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
166.	BW1880-0013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
167.	BW1890-0014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
168.	BW18100-0015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
169.	BW1838-015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
170.	BW1850-017	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
171.	BW18100-0115	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 100
172.	BW1838-025	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
173.	BW1850-027	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	70 / 35
174.	BW1950-0010	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
175.	BW1960-0011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
176.	BW1970-0012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70

177.	BW1980-0013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
178.	BW1990-0014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
179.	BW19100-0015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
180.	BW19100-0017	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 100
181.	BW19100-0020	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
182.	BW1938-015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
183.	BW1950-017	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
184.	BW1938-025	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
185.	BW1950-026	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	60 / 30
186.	BW2150-2010	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	50 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	100 / 50
187.	BW2160-2011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	110 / 60
188.	BW2170-2012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	70 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	120 / 70
189.	BW2180-2013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	80 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	130 / 80
190.	BW2190-2014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	90 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	140 / 90
191.	BW21100-2015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	100 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	150 / 100
192.	BW2350-307	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	50 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	70 / 35

193.	BW2360-309	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90 / 40
194.	BW2360-3011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	110 / 60
195.	BW2370-3012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	70 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	120 / 70
196.	BW2380-3013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	80 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 80
197.	BW2390-3013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 60
198.	BW2390-3014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	140 / 90
199.	BW1850-W0010	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
200.	BW1860-W0011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
201.	BW1870-W0012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
202.	BW1880-W0013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
203.	BW1890-W0014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
204.	BW18100-W0015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
205.	BW1838-W015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
206.	BW1850-W017	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
207.	BW18100-W0115	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 100
208.	BW1838-W025	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25

209.	BW1850-W027	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	70 / 35
210.	BW1950-W0010	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
211.	BW1960-W0011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
212.	BW1970-W0012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
213.	BW1980-W0013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
214.	BW1990-W0014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
215.	BW19100-W0015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
216.	BW19100-W0017	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 100
217.	BW19100-W0020	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
218.	BW1938-W015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
219.	BW1950-W017	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
220.	BW1938-W025	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
221.	BW1950-W026	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	60 / 30
222.	BW2160-W2011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	110 / 60
223.	BW2170-W2012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	70 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	120 / 70
224.	BW2180-W2013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	80 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	130 / 80

225.	BW2190-W2014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	90 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	140 / 90
226.	BW21100-W2015	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	100 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	150 / 100
227.	BW2350-W307	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	50 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	70 / 35
228.	BW2360-W309	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90 / 40
229.	BW2360-W3011	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	110 / 60
230.	BW2370-W3012	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	70 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	120 / 70
231.	BW2380-W3013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	80 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 80
232.	BW2390-W3013	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 60
233.	BW2390-W3014	Cog W-Blunt B / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	140 / 90
234.	CW18100-3417	Cog W-Blunt C / 1 канюля-носитель типа W	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	6 / (0,630 – 0,670)	170 / 37 [45]
235.	CW18100-W3417	Cog W-Blunt C / 1 канюля-носитель типа W	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	6 / (0,630 – 0,670)	170 / 37 [45]
236.	AL1850-0010	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
237.	AL1860-0011	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
238.	AL1870-0012	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
239.	AL1880-0013	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
240.	AL1890-0014	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90

241.	AL18100-0015	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
242.	AL1838-015	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
243.	AL1850-017	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
244.	AL18100-0115	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
245.	AL1950-0010	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
246.	AL1960-0011	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
247.	AL1970-0012	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
248.	AL1980-0013	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
249.	AL1990-0014	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
250.	AL19100-0015	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 90
251.	AL19100-0017	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 90
252.	AL19100-0020	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
253.	AL1938-015	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
254.	AL1950-017	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
255.	AL19100-0115	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
256.	AL19100-0117	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	170 / 90

257.	AL19100-0120	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	200 / 90
258.	AL1850-W0010	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
259.	AL1860-W0011	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
260.	AL1870-W0012	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
261.	AL1880-W0013	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
262.	AL1890-W0014	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
263.	AL18100-W0015	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
264.	AL1838-W015	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
265.	AL1850-W017	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
266.	AL18100-W0115	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
267.	AL1950-W0010	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
268.	AL1960-W0011	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
269.	AL1970-W0012	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
270.	AL1980-W0013	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
271.	AL1990-W0014	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
272.	AL19100-W0015	Cog L-Blunt A / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 90

273.	AL19100-W0017	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 90
274.	AL19100-W0020	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
275.	AL1938-W015	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
276.	AL1950-W017	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
277.	AL19100-W0115	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 90
278.	AL19100-W0117	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	170 / 90
279.	AL19100-W0120	Cog L-Blunt A / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	200 / 90
280.	BL1850-0010	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
281.	BL1860-0011	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
282.	BL1870-0012	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
283.	BL1880-0013	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
284.	BL1890-0014	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
285.	BL18100-0015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
286.	BL1838-015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
287.	BL1850-017	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
288.	BL18100-0115	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 100


289.	BL1838-025	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
290.	BL1850-027	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	70 / 35
291.	BL1950-0010	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
292.	BL1960-0011	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
293.	BL1970-0012	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
294.	BL1980-0013	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
295.	BL1990-0014	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
296.	BL19100-0015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
297.	BL19100-0017	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 100
298.	BL19100-0020	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
299.	BL1938-015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
300.	BL1950-017	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
301.	BL1938-025	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
302.	BL1950-026	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	60 / 30
303.	BL2150-2010	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	50 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	100 / 50
304.	BL2160-2011	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	110 / 60

305.	BL2170-2012	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	70 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	130 / 80
306.	BL2180-2013	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	80 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	130 / 80
307.	BL2190-2014	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	90 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	140 / 90
308.	BL21100-2015	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	21G / (0,800 – 0,830)	100 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	150 / 100
309.	BL2350-307	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	50 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	70 / 35
310.	BL2360-309	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90 / 40
311.	BL2360-3011	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	110 / 60
312.	BL2370-3012	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	70 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	120 / 70
313.	BL2380-3013	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	80 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 80
314.	BL2390-3013	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 60
315.	BL2390-3014	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Фиолетовый	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	140 / 90
316.	BL1850-W0010	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
317.	BL1860-W0011	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
318.	BL1870-W0012	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
319.	BL1880-W0013	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
320.	BL1890-W0014	Cog L-Blunt B / I канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90

321.	BL18100-W0015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
322.	BL1838-W015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
323.	BL1850-W017	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35
324.	BL18100-W0115	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	150 / 100
325.	BL1838-W025	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	50 / 25
326.	BL1850-W027	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	70 / 35
327.	BL1950-W0010	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	100 / 50
328.	BL1960-W0011	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	60 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	110 / 60
329.	BL1970-W0012	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	70 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	120 / 70
330.	BL1980-W0013	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	80 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	130 / 80
331.	BL1990-W0014	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	90 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	140 / 90
332.	BL19100-W0015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	150 / 100
333.	BL19100-W0017	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	170 / 100
334.	BL19100-W0020	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	100 (+1,5 / -2,5)	4 / (0,400 – 0,499)	200 / 90
335.	BL1938-W015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	50 / 25
336.	BL1950-W017	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5 / (0,500 – 0,570)	70 / 35

337.	BL1938-W025	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	38 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	80 / 30
338.	BL1950-W026	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	19G / (1,030 – 1,100)	50 (+1,5 / -2,5)	5; 6 / (0,571 – 0,610)	60 / 30
339.	BL2160-W2011	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	60 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	110 / 60
340.	BL2170-W2012	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	70 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	120 / 70
341.	BL2180-W2013	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	80 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	130 / 80
342.	BL2190-W2014	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	90 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	140 / 90
343.	BL21100-W2015	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	21G / (0,800 – 0,830)	100 (+1,5 / -2,5)	3; 3,5 / (0,340 – 0,399)	150 / 100
344.	BL2350-W307	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	50 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	70 / 35
345.	BL2360-W309	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	90 / 40
346.	BL2360-W3011	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	60 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	110 / 60
347.	BL2370-W3012	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	70 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	120 / 70
348.	BL2380-W3013	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	80 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 80
349.	BL2390-W3013	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	130 / 60
350.	BL2390-W3014	Cog L-Blunt B / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	23G / (0,600 – 0,673)	90 (+1,5 / -2,5)	2,5; 3 / (0,250 – 0,339)	140 / 90
351.	CL18100-3417	Cog L-Blunt C / 1 канюля-носитель	Фиолетовый	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	6 / (0,630 – 0,670)	170 / 37 [45]
352.	CL18100-W3417	Cog L-Blunt C / 1 канюля-носитель типа L	Белый (неокрашенная)	18G / (1,200 – 1,300)	100 (+1,5 / -2,5)	6 / (0,630 – 0,670)	170 / 37 [45]

На рисунке 3 представлено схематичное изображение медицинского изделия вариантов исполнения с зубчатой поверхностью и двумя стандартными иглами AD11S00-92, AD11S00-172, AD16S00-172, AD11B00-W92, AD11B00-W172, AD16B00-W172, AD11S00-W92, AD11S00-W172, AD16S00-W172, CD11B34-43, CD11S34-43, CD11B34-W43, CD11S34-W43. Также на рисунке 3 приведены возможные формы острия иглы в зависимости от типа применяемой в медицинском изделии иглы: В-тип или RC-тип. Технические и функциональные характеристики медицинского изделия вышеуказанных вариантов исполнения с двумя стандартными иглами представлены в Таблице 3. При этом габаритные размеры приведены с погрешностью $\pm 5\%$, если не указано иное.

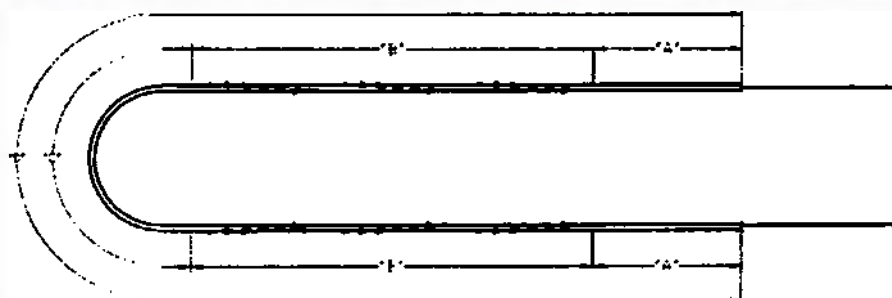

Форма острия иглы:

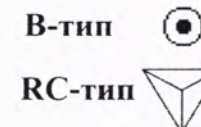


Рис. 3. Схематичное изображение медицинского изделия вариантов исполнения с зубчатой поверхностью и двумя стандартными иглами

Таблица 3. Технические и функциональные характеристики медицинского изделия вариантов исполнения с зубчатой поверхностью и двумя стандартными иглами⁹

№	Вариант исполнения	Тип нити / тип ¹⁰ и кол-во игл	Цвет нити	Размеры иглы		Размеры нити				
				Внешний диаметр, мм	Длина, мм	Метрический размер ¹¹ / диаметр нити, мм	Номинальные длины нити (обозначения длин приведено на рисунке 3) ¹² , мм			
							A	B (номинальная длина зубчатой поверхности)	C	D (номинальная длина нити)
1.	AD11B00-92	Cog A / 2 атравматические В-типа	Фиолетовый	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	50	90	20	300
2.	AD11B00-172	Cog A / 2 атравматические В-типа	Фиолетовый	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
3.	AD16B00-172	Cog A / 2 атравматические В-типа	Фиолетовый	1,0	160	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
4.	AD11S00-92	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Фиолетовый	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	50	90	20	300

⁹ - Примечание: габаритные размеры (длина и диаметр нити и иглы) приводятся с погрешностью $\pm 5\%$

¹⁰ - Примечание: формы острия иглы в зависимости от типа иглы приведены на рисунке 18а.

¹¹ - Примечание: для каждого варианта исполнения задается возможный диапазон диаметра нити. В случае, если возможные значения соответствуют более, чем одному метрическому размеру, указываются оба метрических размера, которым может соответствовать диапазон диаметра нити (например, 2,5; 3). Учитывая, что для каждого значения метрического размера установлено однозначное соответствие значения разрывной нагрузки в простом узле, усилия отрыва от иглы, при испытаниях таких вариантов исполнения следует учитывать возможный наихудший случай.

¹² - Примечание: фактическая длина нити должна составлять не менее 98% от номинальной

5.	AD11S00-172	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Фиолетовый	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
6.	AD16S00-172	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Фиолетовый	1,0	160	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
7.	AD11B00-W92	Cog A / 2 атравматические B-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	50	90	20	300
8.	AD11B00-W172	Cog A / 2 атравматические B-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
9.	AD16B00-W172	Cog A / 2 атравматические B-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	160	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
10.	AD11S00-W92	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	50	90	20	300
11.	AD11S00-W172	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	110	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
12.	AD16S00-W172	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	160	4 / (0,400 – 0,499)	60	170	20	480
13.	CD11B34-43	Cog A / 2 атравматические B-типа	Фиолетовый	1,0	110	6 / (0,630 – 0,670)	40	43	3	169
14.	CD11S34-43	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Фиолетовый	1,0	110	6 / (0,630 – 0,670)	40	43	3	169
15.	CD11B34-W43	Cog A / 2 атравматические B-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	110	6 / (0,630 – 0,670)	40	43	3	169
16.	CD11S34-W43	Cog A / 2 атравматические RC-типа	Белый (неокрашенная)	1,0	110	6 / (0,630 – 0,670)	40	43	3	169

Специфические технические характеристики нитей с зубчатой поверхностью, относящихся к типам Cog A, Cog B, Cog C, представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Специфические характеристики нитей типов Cog A, Cog B, Cog C¹³.

Характеристика	Значение для нитей типа «Cog A»	Значение для нитей типа «Cog B»	Значение для нитей типа «Cog C»
Расстояние от начала нити до 1-й зазубрины, мм ± 5%	40	40	0 (началом нити является зазубрина)

¹³ - Примечание: габаритные размеры (длина и диаметр нити и иглы) приводятся с погрешностью +/- 5%

Расстояние от последней зазубрины до конца нити, мм $\pm 5\%$	70	70	85
Расстояние между зазубринами, мм, $\pm 15\%$	1,5	1,5	2,0
Диаметр зазубрины в наиболее широкой части, мм	0,400 – 0,499	0,500 – 0,570	0,830-1,000
Диаметр зазубрины в наиболее узкой части, мм	0,250 – 0,339	0,200 – 0,249	0,295-0,370
Угол направленности зазубрин, $^\circ \pm 1$	90°	90°	180°
Количество зазубрин на одной нити	67	67	42

Специфические технические характеристики носителей, кроме игл В-типа и RC-типа, представлены в таблице 6.

Таблица 6. Специфические технические характеристики носителей¹⁴

Калибр, Гейдж / внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм, не менее	Угол первичного среза, $^\circ$	Нагрузка для проверки прочности соединения коннектора и иглы ¹⁵ , Н	Цветовое кодирование по ISO 6009 (коннектор)
18G / (1,200 – 1,300)	0,910	11 $\pm$ 2	69	Розовый
19G / (1,030 – 1,100)	0,750	11 $\pm$ 2	69	Кремовый
21G / (0,800 – 0,830)	0,547	11 $\pm$ 2	44	Темно-зеленый
23G / (0,600 – 0,673)	0,370	11 $\pm$ 2	34	Темно-синий
25G / (0,500 – 0,530)	0,292	11 $\pm$ 2	22	Оранжевый

¹⁴ - Примечание: габаритные размеры (длина и диаметр нити и иглы) приводятся с погрешностью $\pm 5\%$

26G / (0,440 – 0,470)	0,241	11 $\pm$ 2	22	Светло-серый
27G / (0,400 – 0,420)	0,190	11 $\pm$ 2	22	Красный
29G / (0,324 – 0,351)	0,165	11 $\pm$ 2	22	Желтый
30G / (0,298 – 0,320)				

Количество смазки полидиметилсилоксан на поверхности трубки игл кроме игл В-типа и RC-типа, не превышает 0,25 мг/см².

Твердость игл по Роквеллу, кроме игл В-типа и RC-типа: 25-37 HRC

Шероховатость поверхности игл вне зоны крепления нити: не более 0,32 мкм

Шероховатость поверхности игл в зоне крепления нити: не более 0,32 мкм

Радиус притупления острия иглы (для стандартных игл): не более 0,03 мм.

Усилие на изгиб и максимальное отклонение игл, кроме игл В-типа и RC-типа, приведены в таблице 7.

Тип стенки иглы для всех игл – TW (тонкостенная).

Таблица 7. Усилие на изгиб и максимальное отклонение иглы

Калибр, Гейдж / внешний диаметр, мм	Усилие на изгиб (изгибающая сила), Н $\pm 0,1$	Максимальное отклонение, мм
18G / (1,200 – 1,300)	12,2	0,81
19G / (1,030 – 1,100)	9,7	0,97
20G / (0,860 – 0,920)	9,6	0,45
21G / (0,800 – 0,830)	4,8	0,43
23G / (0,600 – 0,673)	5,1	0,40
25G / (0,500 – 0,530)	3,1	0,51
26G / (0,440 – 0,470)	3,4	0,34
27G / (0,400 – 0,420)	1,6	0,12
28G / (0,349 – 0,370)	1,3	0,11
29G / (0,324 – 0,351)	12,2	0,81
30G / (0,298 – 0,320)	9,7	0,97

Характеристики стандартных игл В-типа и RC-типа приведены в таблице 8.

Таблица 8. Характеристики стандартных игл В-типа и RC-типа

Характеристика	Значение величины
----------------	-------------------

¹⁵ - Примечание: после приложения указанной минимальной нагрузки в направлении выдергивания иглы из коннектора игла остается в коннекторе.

Твердость по Виккерсу (HV)	4900 – 6475 Н/мм ²
Параметры шероховатости поверхности (кроме зоны крепления нити)	не более Ra 0,32 мкм
Параметры шероховатости поверхности в зоне крепления нити	не более Rz 20 мкм
Острота колющей части	не более 0,025 мм
Ширина режущих ребер (для RC-типа)	не более 0,025 мм
Отклонение от прямолинейности	не более 2 % от длины

Все типы нитей являются рассасывающимися и синтетическими. Классификация типов нитей по структуре приведена в Таблице 9.

Таблица 9. Классификация типов нитей по структуре.

Наименование типа нити согласно Таблице 4	Структура (многофиламентные / мононити)	Структура многофиламентных нитей
Mono	Мононити	Не являются многофиламентными
Mono Screw	Мононити	Не являются многофиламентными
Double	Многофиламентные	Крученые
Double Screw	Многофиламентные	Крученые
Triple Screw	Многофиламентные	Крученые
Braid	Многофиламентные	Комплексные
L-Blunt Mono	Мононити	Не являются многофиламентными
L-Blunt Multi B	Многофиламентные	Плетеные
L-Blunt Multi BM	Многофиламентные	Плетеные
L-Blunt Multi BB	Мононити	Не являются многофиламентными
W-Blunt Mono	Мононити	Не являются многофиламентными
Cog A	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Cog B	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Cog C	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Cog W-Blunt A	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Cog W-Blunt B	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Cog W-Blunt C	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Cog L-Blunt A	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Cog L-Blunt B	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными

Cog L-Blunt C	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Double Arm Cog A	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными
Double Arm Cog C	Мононити с зазубринами	Не являются многофиламентными

Разрывная нагрузка в простом узле нитей приведена в таблице 10.

Таблица 10. Разрывная нагрузка в простом узле нитей.

Метрический размер нити	Разрывная нагрузка в простом узле нитей (не менее), Н	
	Для многофиламентных нитей	Для мононитей
0,5	1,4	0,7
0,7	2,5	1,4
1	6,8	2,5
1,5	9,5	6,8
2	17,5	9,5
2,5	21,0	17,5
3	26,8	21,0
3,5	39,0	26,8
4	50,8	39,0
5	63,5	50,8
6	71,5	63,5

Прочность крепления нити к стандартным иглам В-типа и RC-типа:

- для метрического размера 4: не менее 15,0 Н;
- для метрического размера 6: не менее 18,0 Н.

Таблица 11. Специфические технические характеристики канюль типа L.

Данные о внешнем диаметре канюли-носителя и внутреннем диаметре канюли указаны в Таблице 6.

Калибр, Гейдж / внешний диаметр, мм	Расстояние от дистального конца до точки наклона к переходной части от тела канюли к боковому отверстию, мм	Глубина бокового отверстия, мм	Угол наклона переходной части от тела канюли к боковому отверстию, ° ± 5°	Длина канюли-носителя, мм
18G / (1,200 – 1,300)	3,0 ± 0,3	0,635 ± 0,050	35	50,0 ± 1,0

19G / (1,030 – 1,100)	3,0 ± 0,3	0,535 ± 0,050		
21G / (0,800 – 0,830)	3,0 ± 0,3	0,451 ± 0,040		
23G / (0,600 – 0,673)	3,0 ± 0,3	0,352 ± 0,040		
27G / (0,400 – 0,420)	3,0 ± 0,3	0,226 ± 0,040		
29G / (0,324 – 0,351)	3,0 ± 0,3	0,019 ± 0,020		
30G / (0,298 – 0,320)	3,0 ± 0,3	0,171 ± 0,040		

Таблица 12. Специфические технические характеристики канюль типа W.

Данные о внешнем диаметре канюли-носителя (А) и внутреннем диаметре канюли-носителя (В) указаны в Таблице 6.

Калибр, Гейдж / внешний диаметр , мм	Расстояние от дистального о конца до конца бокового отверстия, мм	Длина вставки внутри бокового отверстия , мм	Диаметр канюли- носителя в области бокового отверстия , мм	Длина бокового отверстия , мм	Угол наклона переходной части от тела канюли к боковому отверстию , °, ± 5°	Длина канюли- носителя , мм
18G / (1,200 – 1,300)	1,0 ± 0,3	0,3 ± 0,2	0,76 ± 0,05	4,0 ± 0,3	45	50,0 ± 1,0
19G / (1,030 – 1,100)	1,0 ± 0,3		0,64 ± 0,05			
21G / (0,800 – 0,830)	0,8 ± 0,3		0,45 ± 0,05			
23G / (0,600 – 0,673)	0,7 ± 0,3		0,41 ± 0,05			

Материалы изготовления: Медицинское изделие (в зависимости от варианта исполнения) изготовлено из следующих материалов: поли(п-диоксанон), нержавеющая сталь, эпоксидная смола, полиуретан, силиконовый эластомер, поликарбонат, полипропилен и полидиметилсилоксан.

Условия эксплуатации: Эксплуатация медицинского изделия осуществляется во внутренней среде организма пациента при температуре от +32°C до +42°C.

Условия хранения:

При хранении не следует допускать воздействия солнечного света. Изделие необходимо беречь от влаги.

Температура воздуха: от +1 °C до +30 °C

Относительная влажность воздуха: от 30% до 70%

Срок хранения медицинского изделия составляет 2 года с даты производства. Недопустимо использовать медицинское изделие в случае истечения срока хранения.

Условия транспортирования:

Медицинские изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, где соблюдаются климатические условия хранения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается воздействие влаги и прямых солнечных лучей при транспортировании.

Температура воздуха: от +1 °C до +30 °C

Относительная влажность воздуха: не более 55%

Медицинское изделие предназначено для однократного применения, техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

СТЕРИЛЬНО. Медицинское изделие стерилизовано этиленоксидом.

Не использовать при повреждении упаковки. Уровень гарантированной стерильности (SAL) составляет 10⁻⁶.

Способ применения:

1. Перед операцией состояние пациента должно быть стабильным.
2. Подготовить вату, смоченную спиртом.
3. Подготовить медицинское изделие, убедившись, что выбран подходящий вариант исполнения.
4. Проверить срок хранения.
5. Убедиться, что упаковка не повреждена.
6. Использовать только после полного понимания способа использования этого медицинского изделия.
7. Проверить состояние содержимого и упаковки медицинского изделия. Использование медицинского изделия в случае повреждения упаковки не допускается!
8. Внимательно прочитать инструкцию по применению.
9. Аккуратно извлечь медицинское изделие из упаковки.
10. Убедиться в отсутствии на медицинском изделии внешних дефектов (трещин, царапин, сколов иглы).
11. Обработать вводимую часть медицинского изделия ватой, смоченной 95% этиловым спиртом, разрешенным к применению в медицинских процедурах.
12. Ввести медицинское изделие в кожу или мышцы пациента. При этом не следует вводить носитель (иглу или канюлю) более, чем на 2/3 есл длины. Далее медленно и осторожно извлечь носитель из кожи или мышцы пациента.

Рекомендации после применения:

- 1) Только для однократного применения. Не использовать повторно.
- 2) Не стерилизовать повторно.
- 3) Не использовать изделия с истекшим сроком годности.

Клинические рекомендации по применению медицинского изделия:

Фиксация субдермальной ткани в заданном положении является процедурой, индивидуальной для каждого пациента. Ввиду этого врач-косметолог или врач-пластический хирург перед применением изделия, основываясь на своих знаниях и навыках, а также

4) Утилизировать медицинское изделие с поврежденной стерильной упаковкой.

5) Утилизировать использованное медицинское изделие в назначенном безопасном месте в соответствии с требованиями местного законодательства.

Комплектность:

Медицинское изделие поставляется совместно с инструкцией по применению в потребительской упаковке, в качестве которой выступает алюминиевый пакет, включающий:

- Для варианта исполнения «Da:all Spiral Double arm» - 1 первичную упаковку медицинского изделия
- Для прочих вариантов исполнения – 2 первичные упаковки медицинского изделия.

Количество медицинских изделий в первичной упаковке (барьерной системе для стерилизации) варьируется в зависимости от требуемого варианта исполнения, и составляет:

Группа вариантов исполнения	Кол-во единиц изделия внутри барьерной системы для стерилизации, шт.
Da:all Mono	10
Da:all Mono Screw	10
Da:all Double	10
Da:all Double Screw	10
Da:all Triple	10
Da:all Braid	4
Da:all Spiral Cobra	4
Da:all Premium Cog	4
Da:all Premium Molding	4
Da:all Spiral Double arm	1

В случае поставки более 5 медицинских изделий они поставляются в групповой упаковке. В этом случае инструкция по применению вкладывается в групповую упаковку.

Количество потребительских упаковок внутри групповой упаковки варьируется в зависимости от требуемого варианта исполнения, и составляет:

Группа вариантов исполнения	Кол-во потребительских упаковок внутри групповой упаковки, шт.
Da:all Mono	5
Da:all Mono Screw	5
Da:all Double	5
Da:all Double Screw	5
Da:all Triple	5
Da:all Braid	5
Da:all Spiral Cobra	5
Da:all Premium Cog	5
Da:all Premium Molding	5
Da:all Spiral Double arm	10

на клинической картине пациента, должен осуществить выбор подходящих нитей. Производитель рекомендует определенные сочетания нитей и носителей (игл, канюль) для анатомических областей применения медицинского изделия.

При выборе между использованием иглы-носителя или канюли носителя, врачу необходимо учитывать следующие особенности:

1. Метод с использованием иглы-носителя является более точным и позволяет достичь желаемых форм и контуров, однако, канюля позволяет разместить нить более плавными движениями, и требует меньше массажа и манипуляций.
2. Калибр должен быть выбран врачом в зависимости от типа кожи пациента.
3. Направление имплантации должно быть выбрано врачом индивидуально, в зависимости от желаемого эффекта.
4. Рекомендации по параметрам установки нитей в зависимости от анатомических областей приведены в Таблице 13 ниже.
5. Если в Таблице 13 для того или иного типа нитей/носителей не указана желаемая анатомическая область, в соответствующей анатомической области следует использовать другой тип нитей/носителей на усмотрение врача.

Таблица 13. Рекомендации по параметрам установки нитей в зависимости от анатомических областей

Тип Mono.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	21-30	20-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	21-30	40-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	21-30	10-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	21-30	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Скулы	21-30	10-60	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Брови	21-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внешние уголки глаз	21-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губы (носогубные складки)	21-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Ягодицы	21-30	50-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Колени	21-30	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя часть руки	21-30	60-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя поверхность бедер	21-30	60-400	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Подбородок	21-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Живот	21-30	150-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Околоушная зона	21-30	10-20	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Декольте	21-30	10-150	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Кисти рук	21-30	20-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Тип Mono Screw.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	23-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	23-30	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Лоб	23-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	23-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Скулы	23-30	10-60	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губы (носогубные складки)	23-30	10-30	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Ягодицы	23-30	50-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Колени	23-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Живот	23-30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Тип Double.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	25-27	20-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	25-27	40-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	25-27	10-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	25-27	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Скулы	25-27	10-60	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Брови	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внешние уголки глаз	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губы (носогубные складки)	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Ягодицы	25-27	50-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Колени	25-27	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя часть руки	25-27	60-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя поверхность бедер	25-27	60-400	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Подбородок	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Живот	25-27	150-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Околоушная зона	25-27	10-20	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Декольте	25-27	10-150	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Кисти рук	25-27	20-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Типы Double Screw и Triple Screw¹⁶.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>

¹⁶ - здесь и далее, если раздел таблицы предусматривает указание несколько типов нитей/носителей, указываются возможные значения калибра всех возможных типов носителей, на которые распространяется соответствующий раздел таблицы.

Шея	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	25-27	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Скулы	25-27	10-60	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губы (носогубные складки)	25-27	10-30	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Ягодицы	25-27	50-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Колени	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Живот	25-27	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Тип Braid.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	21, 23, 25	1-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	21, 23, 25	1-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	21, 23, 25	1-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Носощечная борозда	21, 23, 25	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Носогубная борозда	21, 23, 25	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губоподбородочная борозда	21, 23, 25	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Околоушная зона	21, 23, 25	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Височная зона	21, 23, 25	6-12	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Тип L-Blunt Mono.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	19, 23, 27, 29, 30	20-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	19, 23, 27, 29, 30	40-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	19, 23, 27, 29, 30	10-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	19, 23, 27, 29, 30	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Скулы	19, 23, 27, 29, 30	10-60	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Брови	19, 23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внешние уголки глаз	19, 23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губы (носогубные складки)	19, 23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Ягодицы	19, 23, 27, 29, 30	50-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Колени	19, 23, 27, 29, 30	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя часть руки	19, 23, 27, 29, 30	60-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя поверхность бедер	19, 23, 27, 29, 30	60-400	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Подбородок	19, 23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Живот	19, 23, 27, 29, 30	150-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Околоушная зона	19, 23, 27, 29, 30	10-20	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Декольте	19, 23, 27, 29, 30	10-150	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Кисти рук	19, 23, 27, 29, 30	20-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Типы L-Blunt Multi B, L-Blunt Multi BM, L-Blunt Multi BB.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	19, 21, 23	1-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	19, 21, 23	1-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	19, 21, 23	1-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Нососечная борозда	19, 21, 23	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Носогубная борозда	19, 21, 23	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губоподбородочная борозда	19, 21, 23	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Околоушная зона	19, 21, 23	1-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Височная зона	19, 21, 23	6-12	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Тип W-Blunt Mono.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	23, 27, 29, 30	20-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	23, 27, 29, 30	40-120	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	23, 27, 29, 30	10-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	23, 27, 29, 30	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Скулы	23, 27, 29, 30	10-60	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Брови	23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внешние уголки глаз	23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Губы (носогубные складки)	23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Ягодицы	23, 27, 29, 30	50-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Колени	23, 27, 29, 30	20-100	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя часть руки	23, 27, 29, 30	60-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Внутренняя поверхность бедер	23, 27, 29, 30	60-400	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Подбородок	23, 27, 29, 30	10-40	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Живот	23, 27, 29, 30	150-300	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Околоушная зона	23, 27, 29, 30	10-20	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Декольте	23, 27, 29, 30	10-150	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Кисти рук	23, 27, 29, 30	20-50	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Типы Cog A, Cog B, Cog C, Cog L-Blunt A, Cog L-Blunt B, Cog L-Blunt C, Cog W-Blunt A, Cog W-Blunt B, Cog W-Blunt C.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Шея	18, 19, 21, 23	8-16	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Грудь	18, 19, 21, 23	6-16	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	18, 19, 21, 23	4-8	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	18, 19, 21, 23	2-20	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Брови	18, 19, 21, 23	2-8	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Ягодицы	18, 19, 21, 23	6-20	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Подбородок	18, 19, 21, 23	2-8	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Типы Double Arm Cog A, Double Arm Cog C.

<i>Анатомическая область</i>	<i>Калибр носителя, Гейдж</i>	<i>Ср. количество шт. для одной процедуры</i>	<i>Глубина имплантации</i>
Грудь	21	2-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Лоб	21	1-4	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Щеки	21	2-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Скулы	21	2-4	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Брови	21	1-4	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Ягодицы	21	2-10	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА
Подбородок	21	2-6	ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Сведения об изделиях, совместно с которыми может использоваться медицинское изделие

В случае, если используются нити на канюлях-носителях, для прокола места, требующего введения нитей, может использоваться инъекционная игла (не поставляется в комплекте).

Требования к игле:

1. Игла должна быть инъекционной, стерильной, одноразовой и соответствовать требованиям ISO 7864.
2. Внешний диаметр иглы должен быть на 1-2 калибра меньше, т.е. с более широким внешним диаметром. Например, при использовании канюли калибром 21G (внешний диаметр 0,800 – 0,830 мм), рекомендуется использовать калибр 19G (1,030 – 1,100 мм) или 20G (0,860 – 0,920 мм).
3. Игла должна быть разрешена к применению в качестве медицинского изделия в установленном порядке. Допустимо использовать, например, «Иглы медицинские инъекционные» производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия (регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/01139 от

24.08.2021 г.), однако, возможно использовать любые разрешенные к применению иглы, соответствующие требованиям, установленным в данном разделе.

4. Способ применения – согласно инструкции по применению иглы. После предварительного прокола с использованием стерильной одноразовой инъекционной иглы канюля-носитель должна быть надлежащим образом вставлена в место, требующее хирургического вмешательства, и должна проталкиваться до введения нити. Не вводить в разрез более чем на 2/3 длины.

Утилизация:

Утилизация использованного (вскрытого) медицинского изделия осуществляется аналогично эпидемиологически опасным отходам (для Российской Федерации – отходы класса опасности Б).

Утилизация неиспользованного медицинского изделия осуществляется аналогично бытовым отходам (для Российской Федерации – отходы класса опасности А).

Символы, используемые на маркировке медицинского изделия:

D:all Mono	Наименование группы вариантов исполнения медицинского изделия
Mono	Тип нити
Absorbable Polydioxanone Suture with Needle, Undyed	Полное наименование медицинского изделия на английском языке
Model	Каталожный номер медицинского изделия (является кратким наименованием варианта исполнения)
SIZE	Калибр нити (Гейдж), диаметр нити, размер нити по Фармакопее США (USP), длина нити
	Наименование и адрес производителя
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Дата изготовления (ГГГГ.ММ.ДД)
	Номер партии
	Использовать до (ГГГГ.ММ.ДД)
Packing unit:	Количество изделий в упаковке
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон условий хранения
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не использовать повторно
	Не стерилизовать повторно
	Стерилизовано этиленоксидом

	Изделие соответствует требованиям Директивы 93/42 ЕС
DO NOT USE IF PACK IS DAMAGED	Не использовать при повреждении упаковки
 Processed	Упаковка запаивается термически
 Processed	Стерилизовано этиленоксидом
EN 868-5	Упаковка медицинского изделия соответствует требованиям EN 868-5
ISO 11607-1	Упаковка медицинского изделия соответствует требованиям ISO 11607-1

Гарантийный срок идентичен основному сроку хранения и составляет 2 года (730 дней) с даты производства медицинского изделия.

Перечень нормативных документов/стандартов:

<i>Стандарт</i>	<i>Наименование</i>
EN ISO 13485:2016	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования
EN ISO 14971:2012	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
EN 1041:2008+A1:2013	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
EN ISO 15223-1:2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования
EN ISO 10993-1:2009	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
EN ISO 10993-3:2014	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследование генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию
EN ISO 10993-5:2009	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
EN ISO 10993-6:2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации
EN ISO 10993-7:2008	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации
EN ISO 10993-10:2010	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
EN ISO 10993-11:2009	Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
EN ISO 11135:2014	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий
EN ISO 11138:2017	Стерилизация медицинских изделий. Биоиндикаторы. Часть 1: Общие требования.
EN ISO 14644-1:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
EN ISO 14644-2:2015	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Мониторинг с целью обеспечения характеристик чистых помещений, связанных с чистотой воздуха по концентрации частиц
EN ISO 14644-3:2005	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
EN ISO 11737-1:2018	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции
EN ISO 11737-2:2009	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процесса стерилизации
EN ISO 11607-1:2017	Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
EN ISO 11607-2:2017	Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки.

[Перевод с английского и корейского языков на русский язык]

[Печать: Нотариальная контора «КОРУС», нотариус Лим Чхэ Квон]

Пом. 301, 15, Мугё-ро, Чун-гу, Сеул,
Корея (Мугё-дон, здание Намган)
Форма № 41

Нотариальная контора «КОРУС»

Тел.: 02-753-2003
Факс: 02-747-3832

Регистрационный номер: 2022 – 11687

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Нотариальная контора
«КОРУС»
(Law Firm CHORUS)

15, Мугё-ро, Чун-гу, Сеул, Корея
(15, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul, Korea)

[Тисненая печать: Нотариальная контора «КОРУС»]

210 мм х 297 мм
(Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²)

[Логотип компании «МЕТА
БИОМЕД КО., ЛТД.»]

Предприятие в Осон: 270, Осонсэнмьён 1-ро, Осон-юп, Хёндок-гу, Чхонджу-си,
Чхунчхон-пукто, 28161, Республика Корея (270, Osongsaengmyeong1-ro, Osong-
eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, Korea)
Отдел продаж: 4-й эт., Тайян Билдинг, 16, Каннам-даэро 95-гил, Сочхогу, Сеул,
Республика Корея (4F Taeyang Bldg, 16, Gangnam-daero 95-gil, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea)
Тел.: +82-2-6933-7521 Факс: +82-2-6933-7525
Эл. почта: cosmed@meta-biomed.com Домашняя страница: www.meta-biomed.com

На бланке компании «МЕТА БИОМЕД КО., ЛТД.» («META BIOMED CO., LTD»)

УТВЕРДИЛ

Президент

О Сук Сон (Ok Suk Song)

/подпись/

[Штамп: «МЕТА БИОМЕД КО., ЛТД.»]

Дата: 23.05.2022 г.

Версия 3.0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Нить стерильная рассасывающаяся полидиоксаноновая для лифтинга на
иглах-носителях или канюлях-носителях, окрашенная и неокрашенная,
варианты исполнения**

[Печать: Нотариальная контора «КОРУС», нотариус Лим Чхэ Квон]

[Текст документа на русском языке]

[Текст на английском и корейском языках идентичен]

Регистрационный номер: 2022 – 11687

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЛИ ЫН СУК (LEE YEUN SUK),
поверенный О СУК СОН,
президента и генерального директора компании «МЕТА БИОМЕД КО., ЛТД.»,
явившийся ко мне, признал указанную
подпись доверителя на прилагаемой
ДОВЕРЕННОСТИ.

Настоящим засвидетельствовано 31 мая 2022 г. в указанной нотариальной конторе.

[Печать: Нотариальная контора «КОРУС», нотариус Лим Чхэ Квон]

Нотариальная контора «КОРУС»

Относится к Прокуратуре центрального округа Сеула

15, Мугё-ро, Чун-гу, Сеул, Корея,

[Печать: Нотариальная контора «КОРУС», нотариус Лим Чхэ Квон]

/подпись/

Подпись нотариуса

Лим Чхэ Квон (Lim Chaе Kwon)

Настоящая нотариальная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея
предоставлять нотариальные услуги с 07 февраля 2020 г. в соответствии с законом № 68.

Российская Федерация

Город Москва.

Двадцатого июля две тысячи двадцать второго года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Краплина Дениса Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022- **37-4616**

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Е.Е. Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 62 лист (-а, -ов).

Е.Е. Прокошенкова

