

Инструкция по применению		
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	Одобрено/ Approved ФИО/Name: <i>Журбаев Алексей Алексеевич</i>	Подпись/Signature  <i>Журбаев Алексей Алексеевич</i>
	Должность/ Position: <i>Индивидуальный предприниматель</i>	

РУ № РЗН ____/____/____ от ____/____/____

Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru, варианты исполнения

1.	Paris Blue: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75; -4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
2.	Cloud R Gray: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75; -4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
3.	Cloud R Blue: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75; -4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
4.	Cloud R Green: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75; -4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
5.	Cloud R Brown: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75; -4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
6.	Cloud R Choco: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75; -4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER.ru	

7.	Cloud Gray: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
8.	Cloud Blue: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
9.	Cloud Green: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
10.	Cloud Brown: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
11.	Cloud Choco: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
12.	Paris Gray: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
13.	Paris Green: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	
14.	Cloud Black: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
15.	New York N Blue: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
16.	New York N Gray: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
17.	New York N Jade: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
18.	Cloud R Violet: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
19.	White Out: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
20.	Black Out: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	
21.	Orlando Gray: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
22.	Orlando Emerald: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
23.	Orlando Blue: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
24.	Sofia Gray: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
25.	Sofia Aqua: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
26.	Sofia Emerald: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
27.	Sofia Choco: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	
28.	Sakura Blue: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
29.	Sakura Gray: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
30.	Dark Night Black: диаметр 14,3мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
31.	Bella Gray: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
32.	Bella Blue: диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
33.	Galaxy Violet: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
34.	Toyo Red: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	
35.	Angeles Gray: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
36.	Havana Gray: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
37.	Havana Brown: диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
38.	BeNatural Blue: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
39.	BeNatural Gray: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.
40.	BeNatural Green: диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр. Инструкция по применению – 1 шт.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

ОПИСАНИЕ

Изделие «Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru» представляет собой медицинское изделие, предназначенное для ношения непосредственно на роговице, а также на смежных лимбальных и склеральных областях глаза для коррекции зрения. Изделия изготовлены из полимерных молекул, которые поглощают или притягивают определенный объем (процент) воды. Изделие предназначено для дневного ношения и является однофокальной линзой.

Линзы имеют УФ фильтр, который препятствует проникновению УФ лучей. Линзы изготовлены методом 3х слойной сендвич технологии. Этот процесс нанесения цвета разделяет контактные линзы на 3 слоя, что эффективно предотвращает контакт пигментного слоя с роговицей глаза.

Рисунок линзы сливается с собственным цветом радужки глаза, для кардинального изменения или усиления естественного цвета глаз.

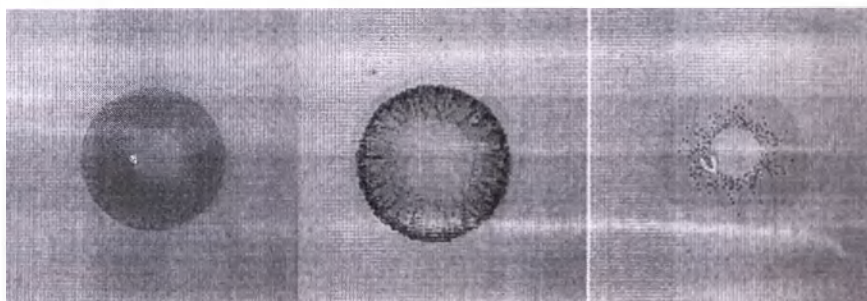


Рисунок 1. Линзы контактные мягкие цветные

Комплект поставки

Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru поставляются стерильными в индивидуальной блистерной упаковке с физиологическим (изотоническим солевым) раствором закрытой алюминиевой фольгой.

Блистерные упаковки запакованы в картонные коробки по 2 шт.

К каждой партии линз приложена инструкция по применению.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

Назначение медицинского изделия

Линзы контактные мягкие цветные предназначены для дневного режима ношения для оптической коррекции зрения лиц, не имеющих заболеваний глаз, в соответствии с рекомендациями специалиста по контактной коррекции.

Показания к применению медицинского изделия

Линзы контактные мягкие цветные показаны к применению для дневного режима ношения для оптической коррекции зрения лиц, не имеющих заболеваний глаз, в соответствии с рекомендациями специалиста по контактной коррекции.

Область применения

Изделие используется в офтальмологии для коррекции миопии.

Противопоказания

- заболевания глаза, повреждения или аномалии, затрагивающие роговицу, конъюнктиву или веки;
- состояния, выявленные офтальмологом, на основании которых запрещено ношение контактных линз.

Побочные эффекты

- повреждение роговицы;
- повреждение конъюнктивы;
- повреждение века;
- микробиологическое инфицирование глаза;
- ощущение инородного тела, чувство дискомфорта в глазах;
- боль в глазах;
- сухость глаз;
- зуд в глазах.

Побочные эффекты могут проявиться из-за неправильной очистки линз и неправильного ухода за линзами и контейнером для линз.

В случае появления побочных эффектов, проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

Рекомендации

1) Используйте правильную левую, правую, переднюю, заднюю части линзы.

→ В случае, когда из-за линзы зрение становится нечетким, снимите ее.

2) В случае загрязнения линзы

→ Тщательно вымойте руки, снимите линзы и промойте их при помощи раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз перед тем, как снова их надеть.

3) Не сушите линзы.

→ В случае высыхания линз, выдержите их в физиологическом (изотоническом солевом) растворе или в растворе для ухода за всеми типами мягких контактных линз, пока они не вернуться в свое нормальное состояние.

4) В случае чувства сухости

→ Не снимая линзы, моргая, добавьте несколько капель раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз в глаз или снимите линзы и, моргая, добавьте несколько увлажняющих капель, рекомендованных индивидуально врачом-офтальмологом.

5) Снимайте линзы перед сном.

→ Если вы спите с надетыми линзами, то они могут прилипнуть к главному яблоку, повредить глаза, что может вызвать кровотечение и болевые ощущения.

6) Регулярно проверяйтесь у врача-офтальмолога.

Примечание. В качестве раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз рекомендуется использовать соответствующие растворы, зарегистрированные Росздравнадзором и допущенные к обращению на территории Российской Федерации. Рекомендуется также применять только те растворы, которые индивидуально рекомендованы врачом-офтальмологом.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

Меры предосторожности

Будьте осторожны, чтобы не порезаться краями линзы

Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные линзы ногтем.

Длительное непрерывное ношение мягких контактных линз приводит к изменению размеров и кривизне эндотелия роговицы по сравнению с людьми, не носящими контактные линзы. Максимальный период непрерывного ношения – 8 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

К каждой партии линз приложена инструкция по применению.

Инструкция по применению в форме электронного документа должна быть размещена на официальном сайте уполномоченного представителя производителя:
<https://urbanlayer.ru/instruction>.

Перед использованием

Чтобы не повредить линзы и глаза, всегда соблюдайте следующее:

- Проверяйте дату истечения срока годности перед покупкой мягких контактных линз.
- Перед каждым применением, в том числе перед первым применением после вскрытия индивидуальной блистерной упаковки, линзы необходимо промыть в растворе для ухода за всеми типами мягких контактных линз. В качестве раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз рекомендуется использовать соответствующие растворы, зарегистрированные Росздравнадзором и допущенные к обращению на территории Российской Федерации. Рекомендуется также применять только те растворы, которые индивидуально рекомендованы врачом-офтальмологом.

Методика промывки линз перед первым применением после вскрытия блистерной упаковки:

- 1) положите линзу на ладонь, нанесите 2-3 капли раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз и аккуратно вотрите его кончиком пальца свободной руки;
- 2) промойте линзу достаточным количеством раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

- Должным образом храните необходимые приспособления для очистки линз.
- Храните косметику, спрей для волос, мыло и другие химические вещества вдали от линз.
- Производите очистку линз сразу после их снятия.
- Для очистки линз используйте раствор для ухода за всеми типами мягких контактных линз. В качестве раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз рекомендуется использовать соответствующие растворы, зарегистрированные Росздравнадзором и допущенные к обращению на территории Российской Федерации. Рекомендуется также применять только те растворы, которые индивидуально рекомендованы врачом-офтальмологом.
- В случае возникновения проблем с линзами или их использованием проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом.
- При использовании линз не рекомендуется применение лекарственных глазных капель и мазей в связи с тем, что компоненты, которые нормализуют работу слизистой, могут скапливаться на поверхности линзы, ухудшая видимость и вызывая неприятные ощущения.
- Во время, когда линзы не используются, храните их в контейнере для хранения линз. В качестве контейнеров для хранения линз рекомендуется использовать контейнеры для хранения линз, зарегистрированные Росздравнадзором и допущенные к обращению на территории Российской Федерации.
- Для увлажнения глаз рекомендуется использовать только те глазные капли, которые предназначены для применения при ношении линз и рекомендованы врачом-офтальмологом.

5.3. Данные о растворах для ухода за линзами

В качестве раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз рекомендуется использовать соответствующие растворы, зарегистрированные Росздравнадзором и допущенные к обращению на территории Российской Федерации. Рекомендуется также применять только те растворы, которые индивидуально рекомендованы врачом-офтальмологом, например:

- 1) Раствор многофункциональный Опти-Фри Реплениш, РУ № ФСЗ 2009/05850;

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

- 2) Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist, РУ № ФСЗ 2011/10610;
- 3) Растворы многоцелевые High Fresh+ для ухода за мягкими контактными линзами, РУ № РЗН 2021/13209;
- 4) Раствор многоцелевой для очистки, хранения, ополаскивания, увлажнения и дезинфекции мягких контактных линз HIGH FRESH+, РУ № ФСЗ 2008/01655;
- 5) Раствор многофункциональный для всех типов контактных линз UNIVERSALE PLUS, РУ № ФСЗ 2011/08827;
- 6) Раствор универсальный "Биотру" (Biotrue®) по уходу за мягкими контактными линзами, РУ № ФСЗ 2011/08903.
- 7) Растворы универсальные офтальмологические для ухода за контактными линзами «MULTIWAVE-STANDARD» и «MULTIWAVE-NEW» в наборах, РУ № РЗН 2016/4019.

Внимание! Ознакомьтесь перед использованием линз:

- Чтобы не допускать попадания грязи на линзы, всегда мойте руки.
- Чтобы не поцарапать линзы, подстригайте ногти.
- Не пользуйтесь кремом или лосьоном перед использованием линз.
- Определите, где находится левая и правая линзы. (Если у вас есть привычка начинать делать все справа, это предотвратит смену линз местами).
- Определите, не перевернута ли линза.

Надевание линз

Перед использованием промойте линзы раствором для ухода за всеми типами мягких контактных линз.

Примечание. В качестве раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз рекомендуется использовать соответствующие растворы, зарегистрированные Росздравнадзором и допущенные к обращению на территории Российской Федерации. Рекомендуется также применять только те растворы, которые индивидуально рекомендованы врачом-офтальмологом.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

Есть 2 способа надевания линз:

1) Поместите линзу на указательный палец правой руки.

① Оттяните нижнее веко средним пальцем.

② Поднимите верхнее веко средним пальцем левой руки.

⚠ Постарайтесь не повредить линзу ногтями при ее взятии.

③ Медленно наденьте линзу на глазное яблоко.

⚠ Не повредите глаза краями линзы.

④ Когда линза коснется роговицы глаза, сначала отпустите нижнее веко, а затем отпустите верхнее веко.

⑤ Убедитесь, что линза встала на свое место, поморгав этим глазом.

2) Возьмите линзу большим и указательными пальцами

① Повторите шаги ①③④⑤

② Вставьте конец линзы между глазом и верхними веками.

Снятие линз

При надевании или снятии линз будьте осторожны, чтобы не повредить глаза. Всегда мойте руки и подстригайте ногти должным образом, не повредите линзу.

① Определите положение линзы.

② Оттяните верхнее веко при помощи пальца левой руки, а нижнее веко при помощи среднего пальца правой руки.

③ После того, как оба указанных пальца будут придерживать веки, вы почувствуете, что касаетесь линзы и сможете ее снять, легко подтолкнув ее, придерживая нижнее веко. На внутренней стороне картонной упаковки линз представлена краткая версия инструкции

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

Очистка линз

Методика очистки линз:

- ① Поместите линзы в ладонь.
- ② Добавьте 1-2 капли раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз.
- ③ Слегка потрите по очереди обе стороны линзы.
- ④ Тщательно промойте каждую линзу раствором для ухода за всеми типами мягких контактных линз.

Примечание. В качестве раствора для ухода за всеми типами мягких контактных линз рекомендуется использовать соответствующие растворы, зарегистрированные Росздравнадзором и допущенные к обращению на территории Российской Федерации. Рекомендуется также применять только те растворы, которые индивидуально рекомендованы врачом-офтальмологом.

Очистка контейнера для линз

После того, как линзы будут извлечены из ячеек контейнера для хранения линз, остатки раствора необходимо слить, ячейки контейнера требуется промыть свежим раствором.

Перед первым применением контейнера для линз необходимо провести его дезинфекцию:

- ① Отсоедините крышки ячеек контейнера для линз от самого контейнера.
- ② Поместите крышки и контейнер для линз в емкость с горячей водой (90 – 100 °C) и выдерживайте в течение 10 минут.
- ③ Извлеките крышки и контейнер для линз из емкости с горячей водой и промойте ячейки контейнера раствором для ухода за всеми типами мягких контактных линз.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

УПАКОВКА

Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru поставляются стерильными в индивидуальной литой полипропиленовой блистерной упаковке, закрытой алюминиевой фольгой с полиэфирным покрытием (первичная упаковка). Каждая блистерная капсула содержит около 2,5 мл физиологического (изотонического солевого) раствора. Блистерные упаковки запечатаны в предварительно проштампованные картонные коробки (защитная упаковка; вторичная упаковка). Картонные коробки содержат по две контактных линзы.

Таблица 1 – Расшифровка символов и надписей на упаковке

Символ	Расшифровка
	Код партии
	Использовать до
	Стерилизовано при помощи пара или сухого тепла
	Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги
	Предупреждение
	Не использовать при повреждении упаковки
DIA	Диаметр
B.C	Базовая кривизна (задний центральный оптический радиус)
SPH	Оптическая сила (задняя вершинная рефракция)
	Высокая проницаемость кислорода

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

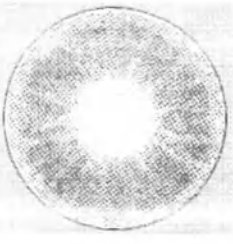
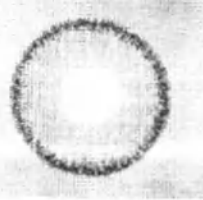
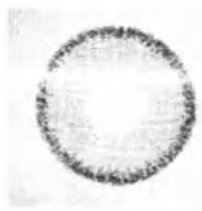
Символ	Расшифровка
	Блокирование УФ лучей
	Управление по контролю за продуктами и лекарствами Кореи
	Символ Надлежащая производственная практика Управление по контролю за продуктами и лекарствами Кореи
ISO 13485	Соответствие стандарту ISO 13485
ISO 9001	Соответствие стандарту ISO 9001
Надписи	
Premium color lens	Цветные линзы премиум
All day moist	Увлажнение в течение всего дня
High oxygen transmissibility	Высокая проницаемость для кислорода
3 layers sandwich technology	3х слойная сэндвич технология
beauty&health	Красота и здоровье
open	Открыть здесь

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия приведено в таблице 2. Где применимо, возможно отклонение от номинальных характеристик на $\pm 10\%$, если не указано иное.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

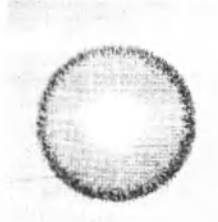
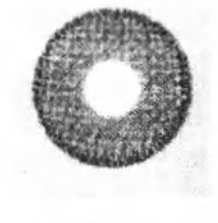
Таблица 2 – Гарантированные производителем значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия/технические характеристики медицинского изделия

№	Наименование	Фотография	Характеристики ¹
1.	Paris Blue: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики ² - 13.3 мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - голубой
2.	Cloud R Gray: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - серый
3.	Cloud R Blue: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - голубой
4.	Cloud R Green: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - зеленый

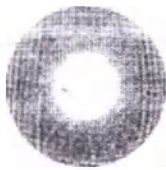
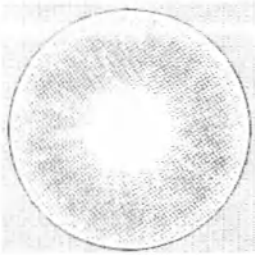
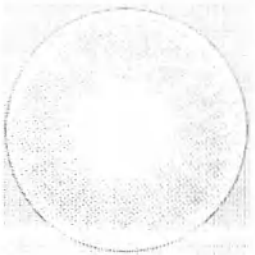
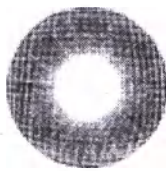
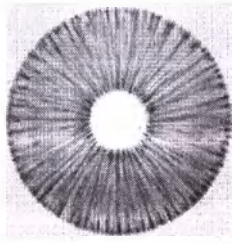
¹ Указаны номинальные значения, допуски см. в таблице 5

² Задняя (вогнутая) окрашенная поверхность линзы, кроме оптической зоны и боковой части

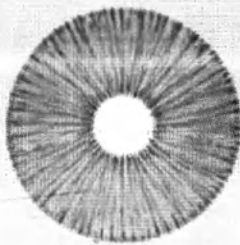
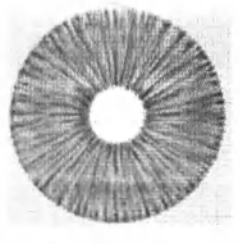
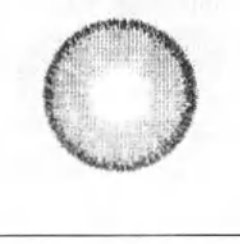
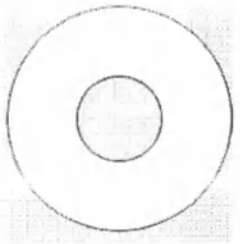
Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

5.	Cloud R Brown: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - коричневый
6.	Cloud R Choco: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - шоколадный
7.	Cloud Gray: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - серый
8.	Cloud Blue: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - голубой
9.	Cloud Green: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - зеленый
10.	Cloud Brown: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм

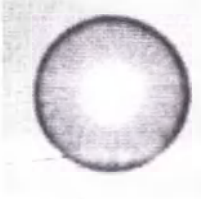
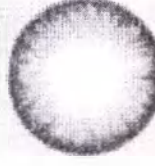
Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

	3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Цвет - коричневый
11.	Cloud Choco: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - шоколадный
12.	Paris Gray: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики - 13.3 мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - серый
13.	Paris Green: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики - 13.3 мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - зеленый
14.	Cloud Black: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - черный
15.	New York N Blue: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики - 13,9мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - голубой

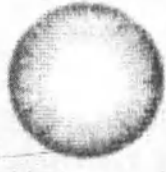
Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

16.	New York N Gray: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики - 13,9мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - серый
17.	New York N Jade: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики - 13,9мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - нефритовый
18.	Cloud R Violet: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,8 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - фиолетовый
19.	White Out: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики - 13,75мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - Белый
20.	Black Out: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики - 14мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - Черный

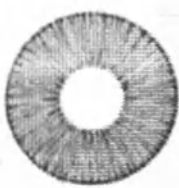
Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

21.	Orlando Gray: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,5 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - серый
22.	Orlando Emerald: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,5 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - изумрудный
23.	Orlando Blue: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13,5 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - голубой
24.	Sofia Gray: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - серый
25.	Sofia Aqua: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - голубой

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

26.	Sofia Emerald: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - изумрудный
27.	Sofia Choco: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - шоколадный
28.	Sakura Blue: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики - 14,2 мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - голубой
29.	Sakura Gray: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики - 14,2 мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - серый
30.	Dark Night Black: Диаметр 14,3мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,3 мм Размер графики - 14 мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - черный

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

31.	Biella Gray: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики - 13,2 мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - серый
32.	Biella Blue: Диаметр 14,2мм; базовая кривизна 8,7мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,2 мм Размер графики - 13,2 мм Базовая кривизна - 8,7 мм Цвет - голубой
33.	Galaxy Violet: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики 14,2 мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - фиолетовый
34.	Tokyo Red: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики 14,4 мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - красный
35.	Angeles Gray: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики 13 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - серый
36.	Havana Gray: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-		Диаметр - 14 мм Размер графики - 13 мм Базовая кривизна - 8,6 мм

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

	3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Цвет - серый
37.	Havana Brown: Диаметр 14,0мм; базовая кривизна 8,6мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14 мм Размер графики 13 мм Базовая кривизна - 8,6 мм Цвет - коричневый
38.	BeNatural Blue: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики 14,3 мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - голубой
39.	BeNatural Gray: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики 14,3 мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - серый
40.	BeNatural Green: Диаметр 14,5мм; базовая кривизна 8,8мм; оптическая сила: -0.50;-0.75;-1.00;-1.25;-1.50;-1.75;-2.00;-2.25;-2.50;-2.75;-3.00;-3.25;-3.50;-3.75;-4.00;-4.25;-4.50;-4.75;-5.00;-5.50;-6.00;-6.50;-7.00;-7.50;-8.00 дптр.		Диаметр - 14,5 мм Размер графики 14,3 мм Базовая кривизна - 8,8 мм Цвет - зеленый

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Наименование материала линзы – 2-гидроксиэтилметакрилат.

Состав материала линзы.

Название	HEMA (2-гидроксиэтилметакрилат)	GMA (глицидилометакрилат)	EGDMA (диметакрилат этиленгликоля)	NVP (N-винилпирролидон)	AIBN (азобисизобутиронитрил)	Общее количество
URBAN LAYER ru	95,6	1,0	1,0	2,0	0,4	100%

Состав раствора в блистерной упаковке: Физиологический (изотонический солевой) раствор – 0,9% раствор хлорида натрия (натрия хлорид CAS No. 7647-14-5, вода CAS No. 7732-18-5).

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ. СРОК ГОДНОСТИ

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей

Хранение

Температура	от 15 до 25 °C
Атмосферное давление	1013,25 гПа
Относительная влажность	Не более 70%

Эксплуатация

Температура	от 15 до 35 °C
Атмосферное давление	1013,25 гПа
Относительная влажность	Не более 70%

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

Транспортировка

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

Температура	от 15 до 25 °С
Атмосферное давление	1013,25 гПа
Относительная влажность	не более 70%

Срок годности изделия составляет 5 лет с даты стерилизации.

По истечении срока годности использование продукта запрещается.

Изделие можно использовать повторно.

Допустимое число циклов обработки – 365 шт.

Срок службы изделия – 12 месяцев.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае повреждения или поломки упаковки, обратитесь к уполномоченному представителю производителя.

Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями и пошаговой инструкцией. Все вопросы, связанные с функционированием и качеством изделия, могут быть адресованы Уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации.

Производитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям стандартов и документации производителя при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за какой-либо причиненный ущерб или повреждения, вызванные использованием изделия после истечения срока годности, указанного на упаковке.

По вопросам качества медицинского изделия, производства Moakon Co., Ltd., Южная Корея, обращаться по адресу:

Индивидуальный предприниматель Турбачев Алексей Алексеевич

Юридический адрес: 454092, Россия, Челябинская обл., Челябинск г., Курчатова ул.16/120.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Взрослые люди с подтвержденным диагнозом – миопия (близорукость).

Периодичность замены – один раз в год.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия стерильны. Способ стерилизации – автоклавирование (пар под давлением).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не применимо.

Инструкция по применению	
Линзы контактные мягкие цветные URBAN LAYER ru	

УТИЛИЗАЦИЯ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинские изделия после многократного использования по назначению или не использованные по назначению должны быть утилизированы как отходы класса А – бытовые отходы. Линзы следует выбрасывать и заменять новой парой по мере износа. Специальные требования к утилизации в случае использования конечным потребителем не предъявляются.

Изделие не предназначено для переработки.

Специальное требование для России: в условиях стационара, склада и т.п., при необходимости, медицинское изделие утилизируют и уничтожают в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами, регламентирующимися СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Производитель 

Moakon Co., Ltd.

Моакон Ко. Лтд., Южная Корея

1F, 27-1, Waryong-ro 72-gil, Seo-gu, Daegu, Republic of Korea

1F, 27-1, Варьон-ро 72-гил, Сео-гу, Даэгу, Республика Корея

Место производства медицинского изделия

Moakon Co., Ltd.

27-1 (Jungni-dong, 1F), Waryong-ro 72-gil, Seo-gu, Daegu, Korea

27-1 (Джунгни-донг, 1F), Варьон-ро 72-гил, Сео-гу, Даэгу, Корея

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации

Индивидуальный предприниматель Турбачев Алексей Алексеевич

Юридический адрес: 454092, Россия, Челябинская обл., Челябинск г., Курчатова ул.16/120

ВСЕГО
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

28 дварцаб ЛИСТА (ОВ)
восемь

