

**Фотографическое изображение медицинского изделия
+ проект маркировки первичной упаковки**

**«Презервативы из натурального латекса Durex® Elite»
производства**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство


1. в свернутом виде:



2. в развернутом виде:



3. в первичной упаковке:

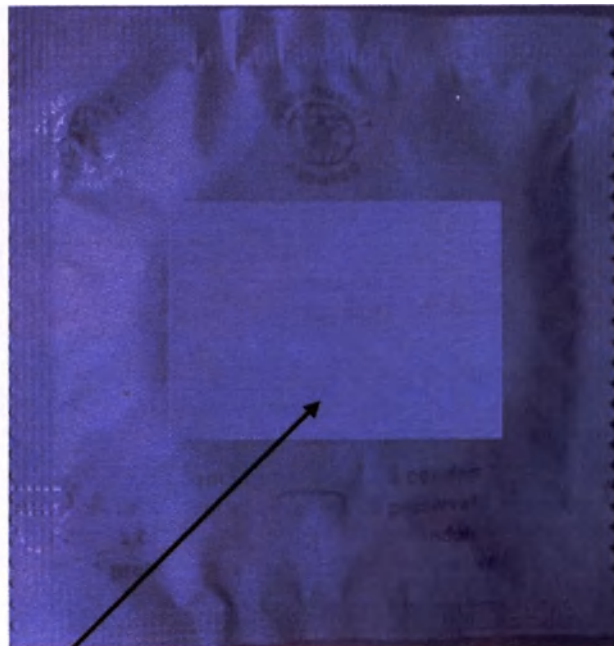

*область нанесения маркировки

Проект маркировки первичной упаковки

Фронтальная сторона:

Логотип: **durex**

Задняя сторона:

Название в формате: "ELITE" или "Elite"

Номер серии в формате: "LOT 0000000000"

Дата окончания срока годности в формате: "☞ гггг-мм"



Всего прошито и скреплено
листом 04

**Фотографические изображения медицинского изделия
во вторичной упаковке**

**«Презервативы из натурального латекса Durex® Elite»
производства**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство

Упаковка – 3 презерватива





Упаковка – 18 презервативов





всего прошито и скреплено
печатью 04 листа
(четыре)

**Проект маркировки
вторичной упаковки медицинского изделия**

**Презервативы из натурального латекса
Durex® Elite**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство

Проект маркировки фронтальной стороны вторичной упаковки



где, «3», «12» и «18» – количество презервативов в потребительской упаковке



- символ обозначения номинальной ширины



- символ обозначения наличия смазки



- символ обозначения толщины

Проект маркировки задней стороны вторичной упаковки (обязательная информация)

Наименование МИ:

Презервативы из натурального латекса Durex® Elite

Производитель (наименование и адрес):

“Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.”, 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство

Страна происхождения медицинского изделия (в зависимости от страны):

Таиланд/ Китай

Импортер/Уполномоченная организация:

ООО “Рекитт Бенкизер Хэлскэр”, Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

Информация о том, что медицинское изделие для одноразового использования:

Презервативы предназначены только для одноразового использования.

Информация об условиях хранения (может быть напечатана на нижней части вторичной упаковки):

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре 0 - 25°C. Избегать механического воздействия и прямых солнечных лучей.

Презерватив не должен соприкасаться с нефтяными продуктами, фенолами и их производными, маслами нефтяного происхождения, бензином, керосином и другими органическими веществами.

Информация о регистрационном удостоверении:

Номер и дату регистрационного удостоверения (Рег. уд.) – см. на упаковке (внизу).

Проект маркировки боковой стороны вторичной упаковки (обязательная информация)

Описание медицинского изделия:

Гладкие, бесцветные, анатомической формы, с накопителем.

Состав медицинского изделия, информация о смазке:

Из натурального латекса, с силиконовой смазкой. Смазка не разрушает сперматозоиды.

Информация о размерах медицинского изделия:

Номинальная длина – 195 мм. Номинальная ширина – 56 мм.

Проект маркировки нижней части вторичной упаковки (обязательная информация)

Информация о сроке годности:

« Годен до (гггг-мм): xxxx-xx»

Информация о номере серии:

« Номер серии: xxxxxxxxxxxx»

Данные о регистрационном удостоверении:

«Рег. уд. № xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx»

Дополнительная информация может быть напечатана на внешнюю сторону вторичной потребительской упаковки, включая ссылки на международные стандарты, символы согласно требованиям национального законодательства, информацию маркетингового/рекламного характера.

Информация на внутренней стороне вторичной упаковки

1.  2.  3.  4. 

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

ВНИМАНИЕ: Проверить срок годности презерватива на упаковке перед использованием. Не использовать презерватив по истечении срока годности. Если индивидуальная упаковка повреждена, либо обнаружено ухудшение свойств презерватива, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

НАЗНАЧЕНИЕ/ ПОКАЗАНИЯ

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем. Медицинское изделие предназначено для использования непрофессионалами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит он свернут в обратную сторону. Выбросить его и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или чрезмерного сжимания им пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Для анального секса или в случае необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Презервативы могут представлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.

Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презерватив предназначен только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который, так же как и любой компонент презерватива, может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива при ощущении дискомфорта или раздражения во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/ дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- если презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100 % защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.

Дата последней редакции инструкции:



всего прошито и скреплено
печатью 05 листов
(мет)