

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"



Д.В. Усейнов

«05» февраля 2021 г

**Фотографические изображения
медицинского изделия
Формалин 20% забуференный HistoSafe®
по ТУ 21.20.23-005-89079081-2017
от "22" июля 2019 г. с изменениями от "05" февраля 2021 г.**

При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-005-89079081-2017 п.1.5.

Варианты первичных упаковок, выдерживающих испытания на химическую стойкость и герметичность, по ГОСТ 33756-2016, приведенных в настоящем документе, отвечают требованиям ТУ 21.20.23-005-89079081-2017 п. 1.2.1 в редакции с изм. 1 и редакции с изм. 2 поставщик для Варианта упаковки №1 – ОАО «СПК «Роман» (РФ) - ТУ 2297-001-00303930-2008, поставщик для варианта упаковки № 2- альтернативный поставщик.

Фото 1. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный - 1 л,
лицевая сторона



Фото 2. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный - 1 л, обратная сторона



Фото 3. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 2,5 л,
(Вариант фасовки № 1)



Фото 3а. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 2,5 л
(вариант фасовки №2)

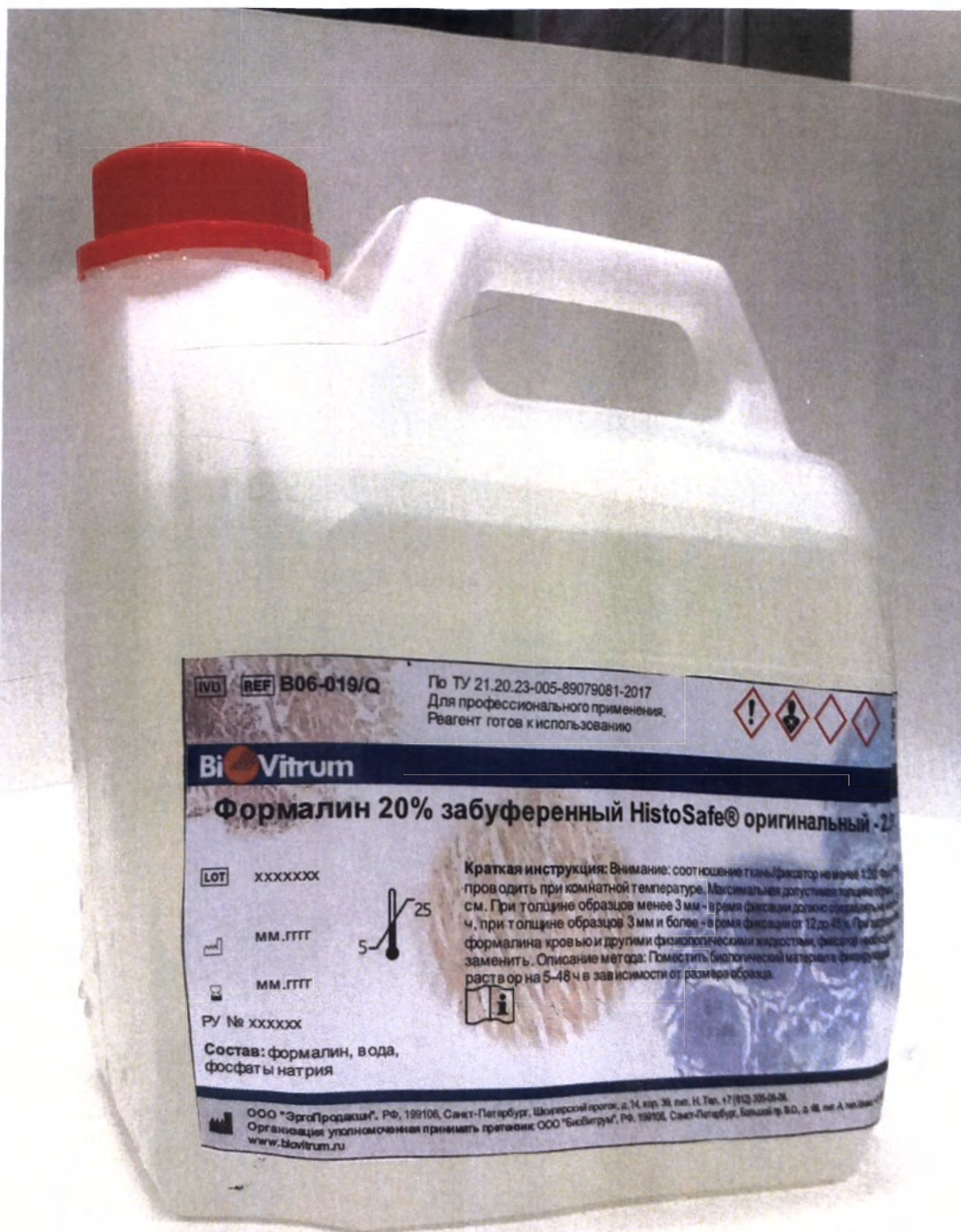


Фото 4. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 5 л, (Вариант фасовки № 1)

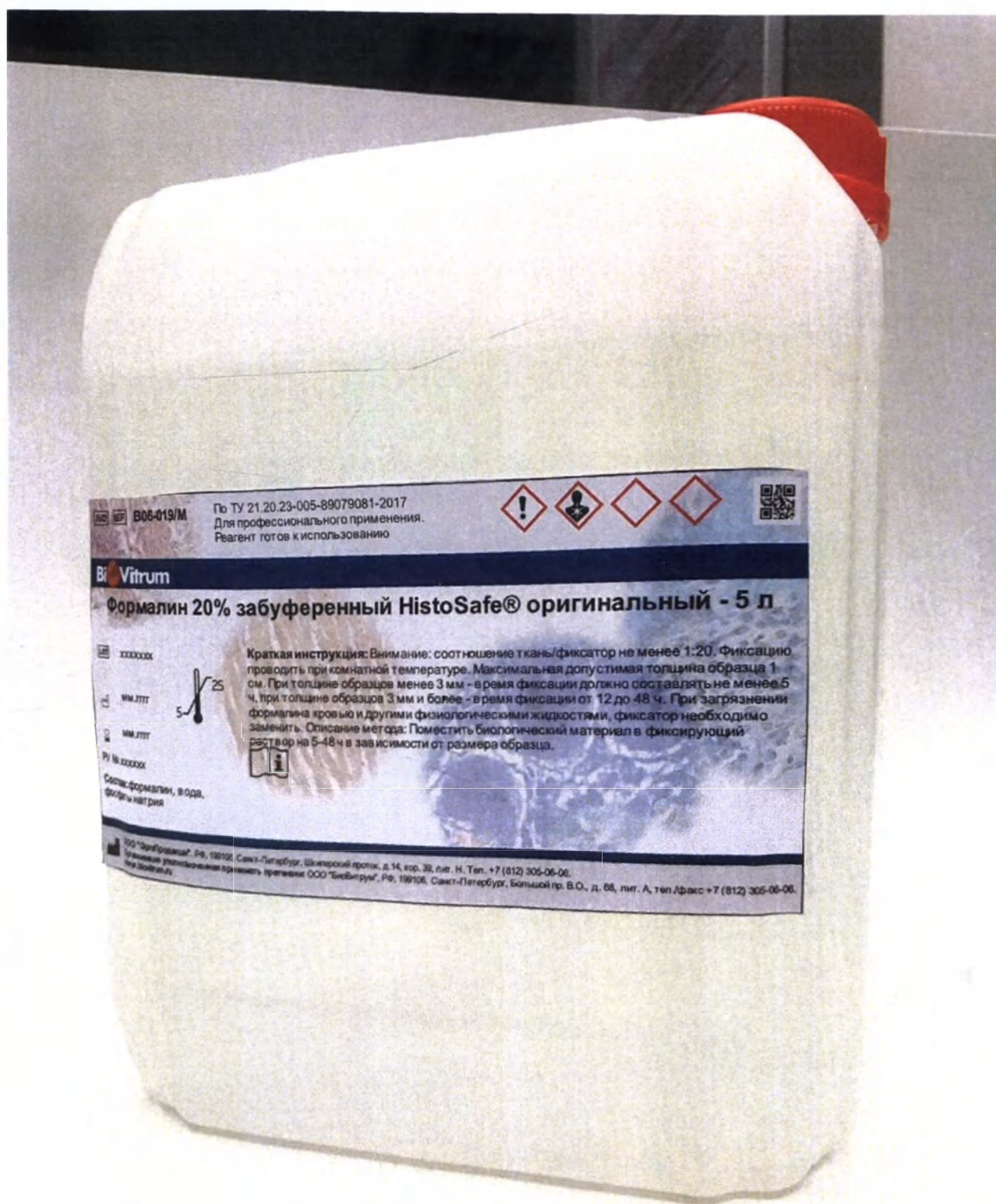


Фото 4а. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 5 л,
(вариант фасовки №2)

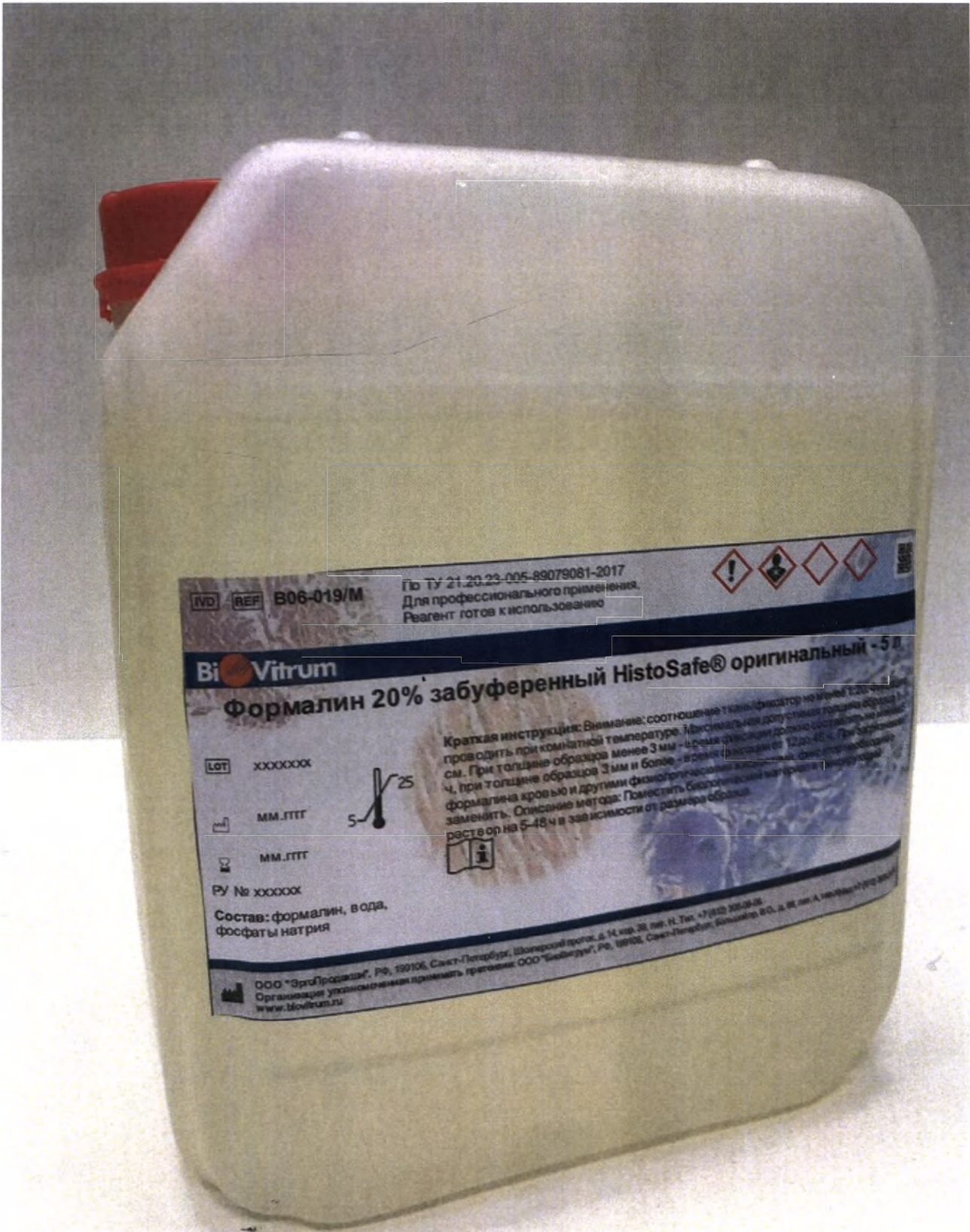


Фото 5. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 10 л,
(Вариант фасовки № 1)

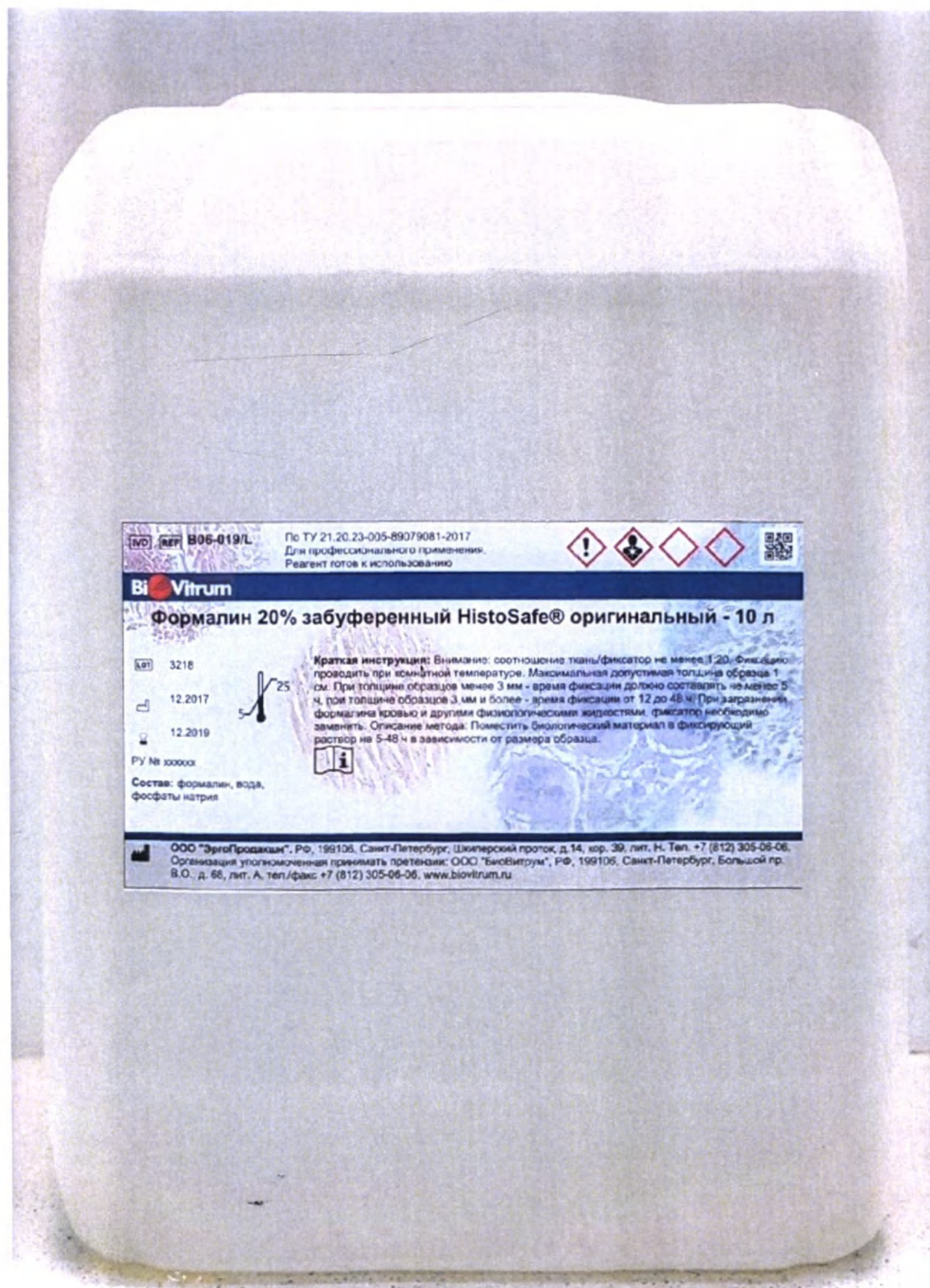


Фото 5а. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 10 л,
(вариант фасовки №2)

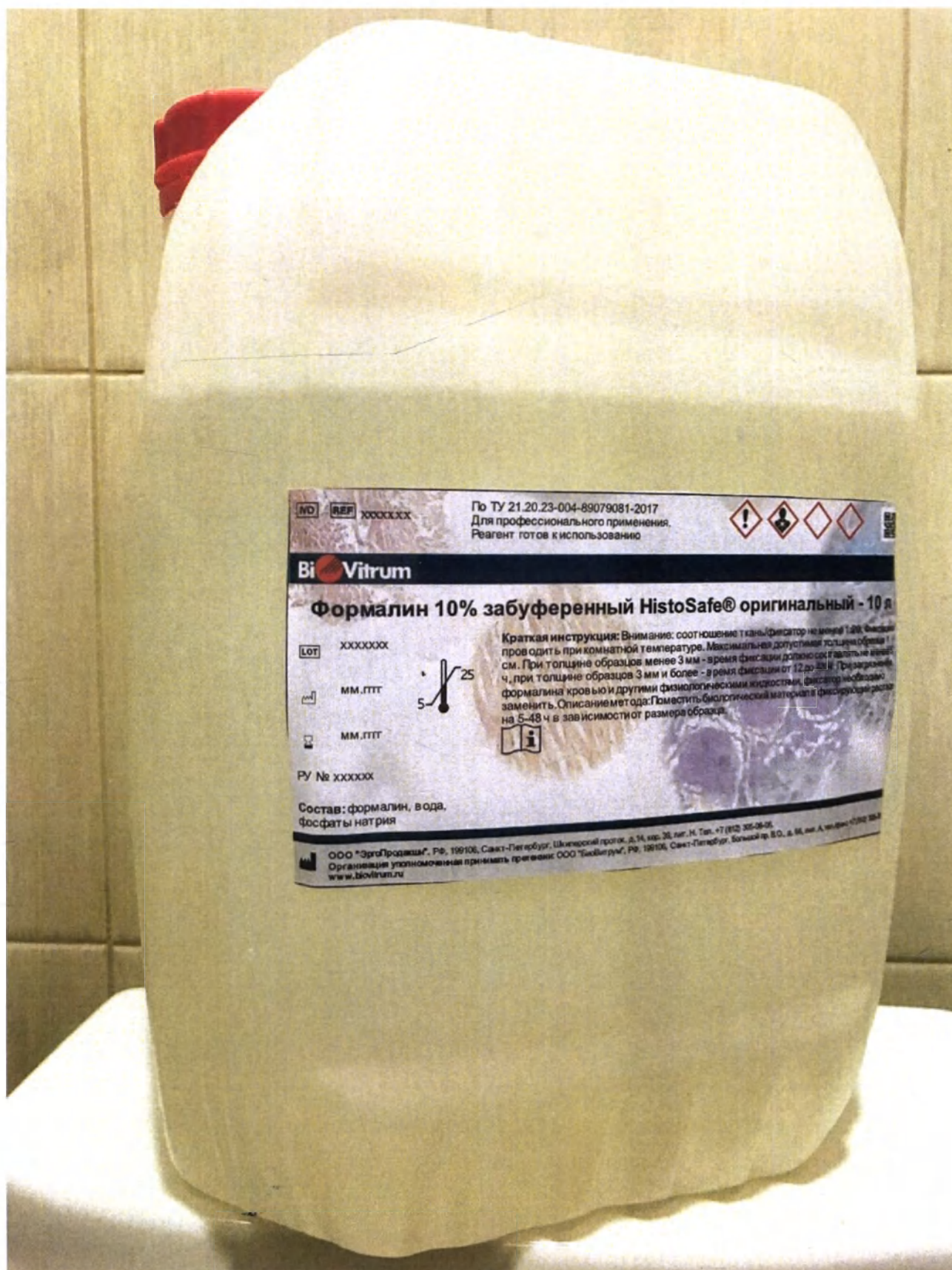


Фото 6. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 20 л,
(Вариант фасовки № 1)



Фото ба. Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный – 20 л, (вариант расовки №2)

IVD

REF

B06-019/X

По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

!

☠

☠

☠

QR

Bi

Vitrum

Формалин 20% забуференный HistoSafe® оригинальный - 20 л

LOT

XXXXXXX

MM.YYYY

5-25

MM.YYYY

5-25

RU № XXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия


Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образца 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При разрыве формалина кровью и другими биологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭпигенПроцесс", Рб, 191106, Санкт-Петербург, Школьный проток, д.14, кор. 36, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномочена принимать претензии ООО "БиоВитрум", Рб, 191106, Санкт-Петербург, Большой пр. Б.О., д. 98, лит. А, телефон +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru



IVD	REF	B06-019/5	По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию.		
Bi Vitrum					
Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистопор - 5 мл (50 шт)					
LOT	XXXXXX		Состав: формалин, вода, фосфаты натрия Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
MM	MM.ГГГГ				
MM	MM.ГГГГ				
PU	Nxxxxxx				
ООО "ЭргоПродак", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шелерский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномочена принимать претензии ООО "Бисвитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Фото 9. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл (25 шт), первичная упаковка

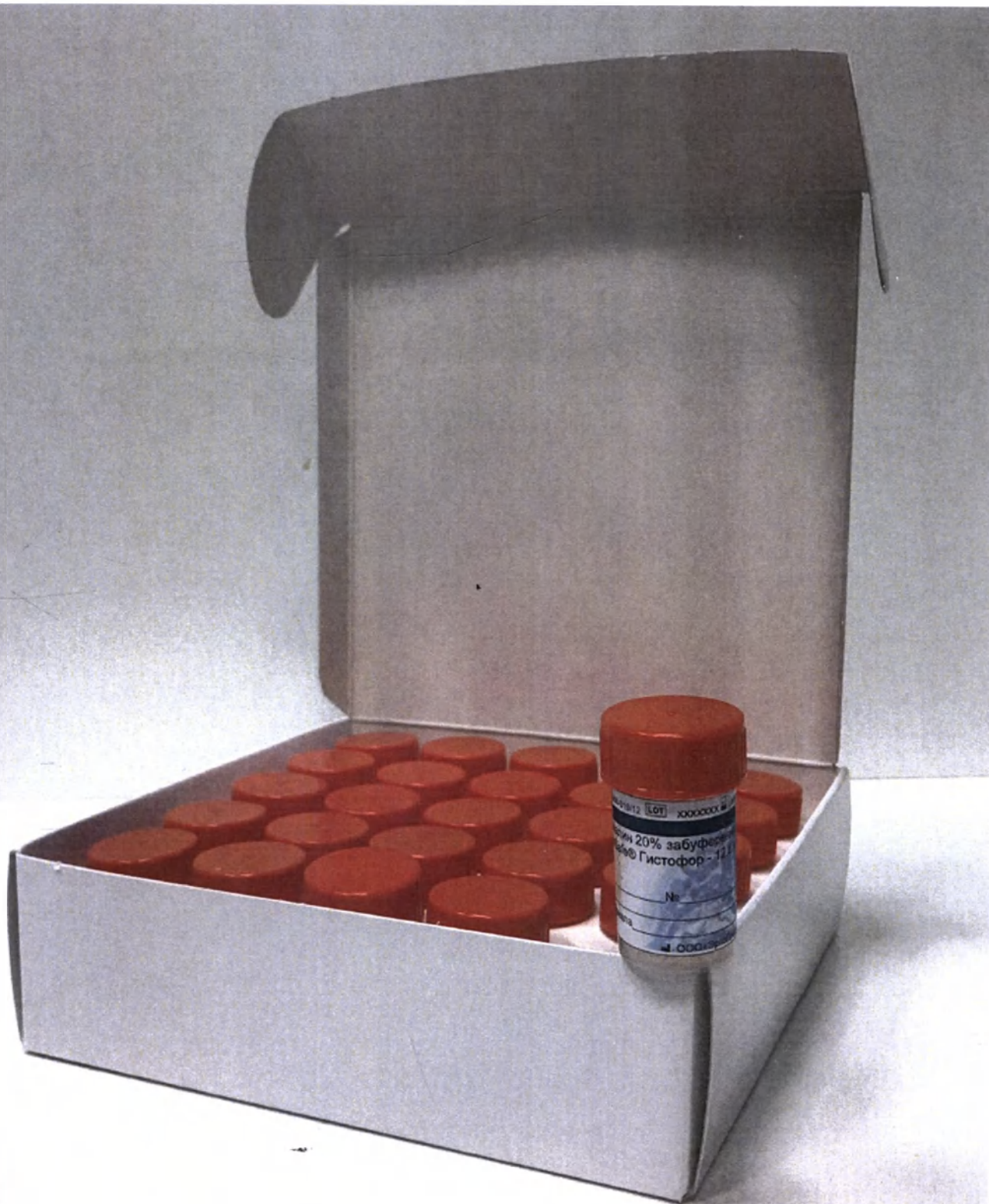




B06-019/12

По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

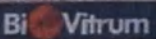

Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 12,5 мл (25 шт)

LOT XXXXXXXX

MM.YYYY 5-25

MM.YYYY

PU NXXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия.

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "Эпротекс", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Школьный проток, д.14, кор. 38, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
 Организация уполномочена принимать претензии ООО "БюсВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 66, лит. А. Тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biosvitrum.ru

Фото 11. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 25 мл (15 шт), первичная упаковка



Bi Vitrum

www.biovitrum.ru

IVD

REF

B06-019/25

По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.



Bi Vitrum

Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 25 мл (15 шт)

LOT

XXXXXXX


MM

MM.ГГГГ

MM

MM.ГГГГ

РУ №XXXXXX

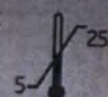

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.




ООО "ЭгреПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.

Организация уполномоченная принимать претензии ООО "Биовитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

www.biovitrum.ru

Фото 13. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 75 мл (12 шт), первичная упаковка

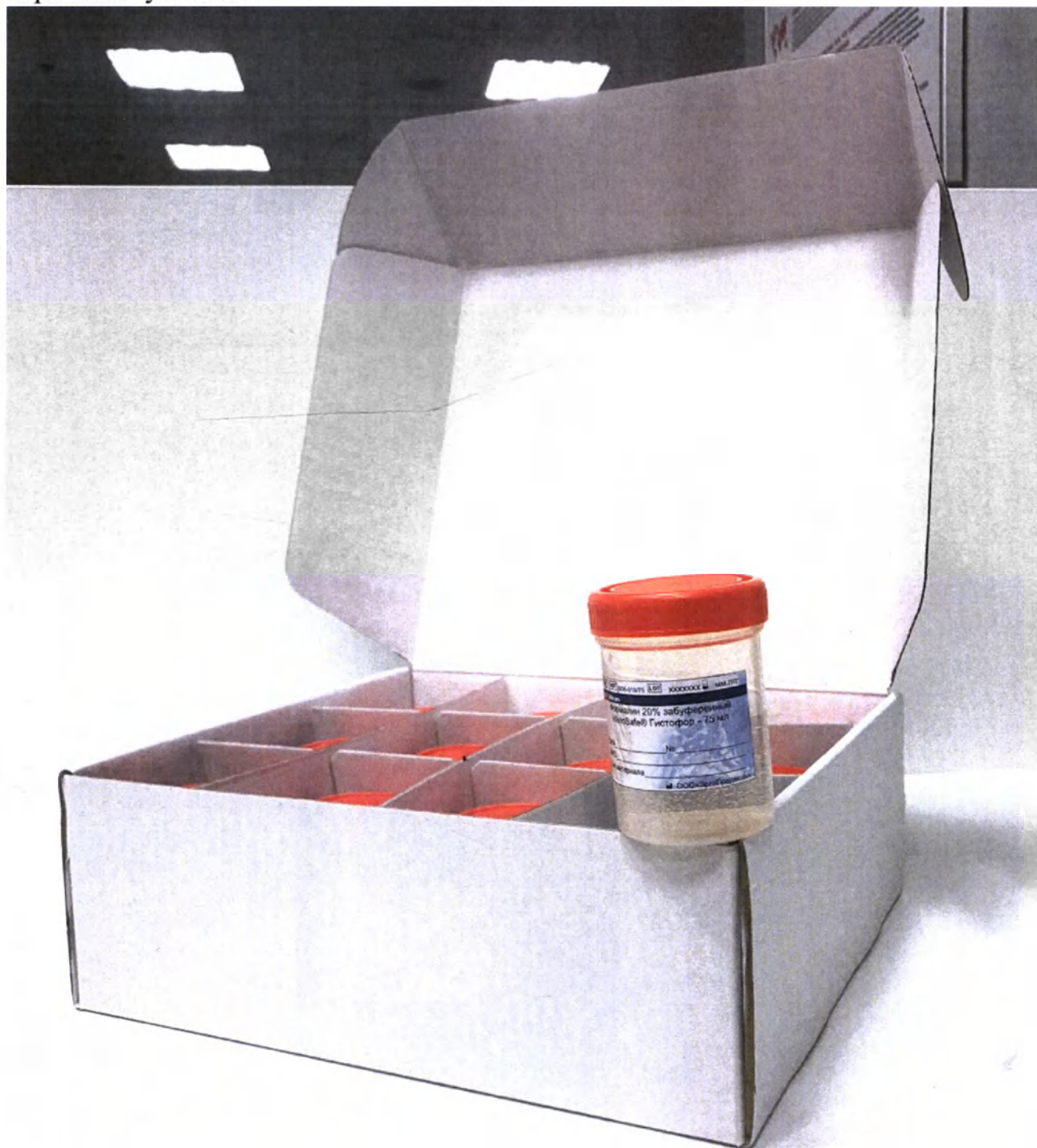

B06-019/75

По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017
Для профессионального применения
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum

Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 75 мл (12 шт)

LOT XXXXXXX

MM.ГГГГ MM.ГГГГ

РУ NXXXXXX

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "Сити-Групп", РФ, 190106, Санкт-Петербург, Школьный проток, д. 14, корп. 3А, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06

Оригинальную упаковку можно проверить, посетив сайт ООО "Сити-Групп", РФ, 190106, Санкт-Петербург, Школьный пр. В.О., д. 68, лит. А, тел. Факс +7 (812) 305-06-06

www.biovitrum.ru

Фото 15. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Гистофор - 250 мл (4 шт), первичная упаковка



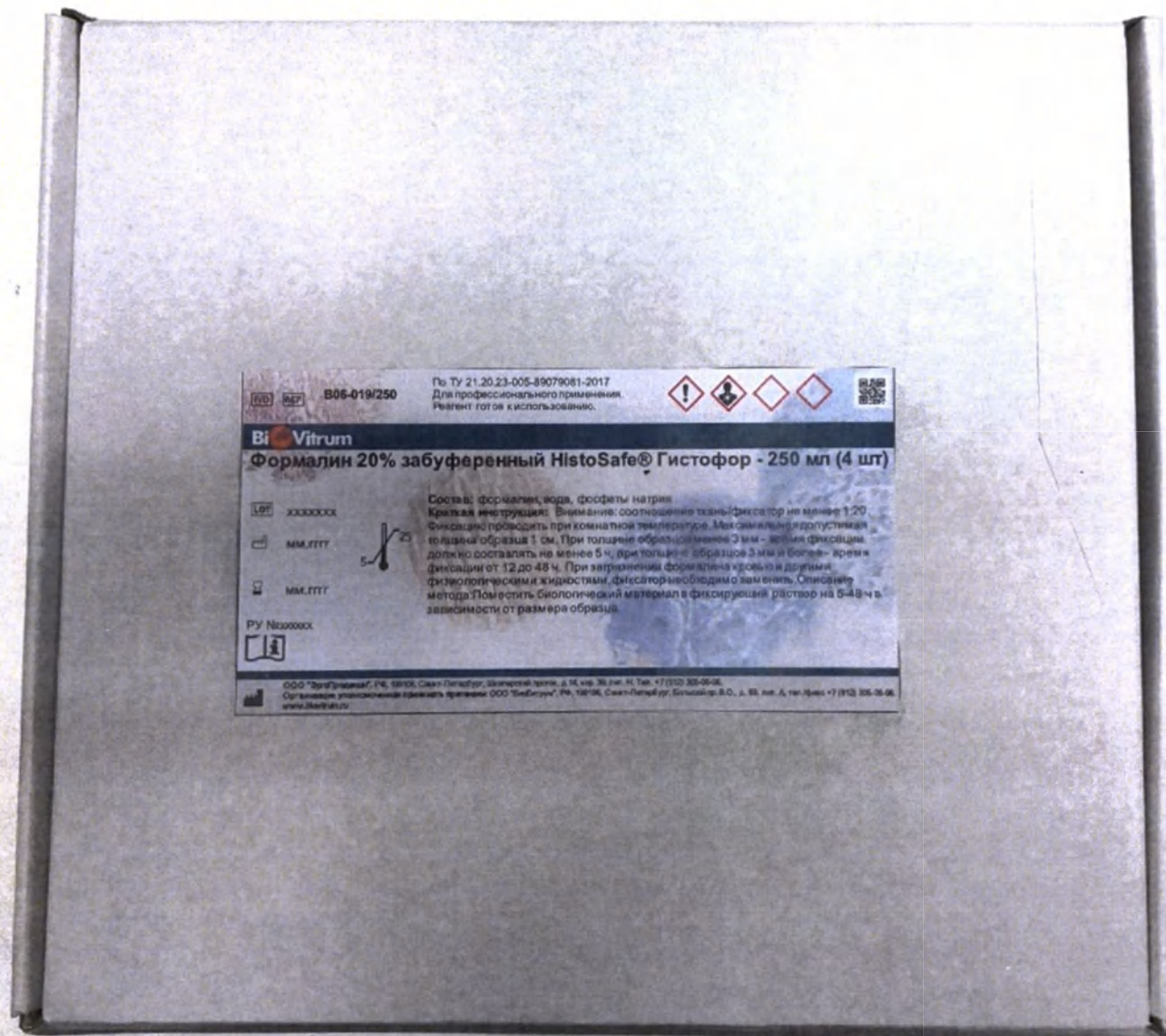


Фото 19. Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel - 12,5 мл (25 шт), первичная упаковка



ИДЧ РЕГ B06-020/12 По ТУ 21.20.23-005-80079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.

Bi Vitrum


Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel - 12,5 мл (25 шт)

LOT 3233 12.2017 12.2019 PY Nexxxxxx

Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метилцеллюлоза
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образца менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образца 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭргоПродакши", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шляперный проток, д.14, кор.39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии. ООО "Биовитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 21. Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel - 25 мл (15 шт), первичная
упаковка

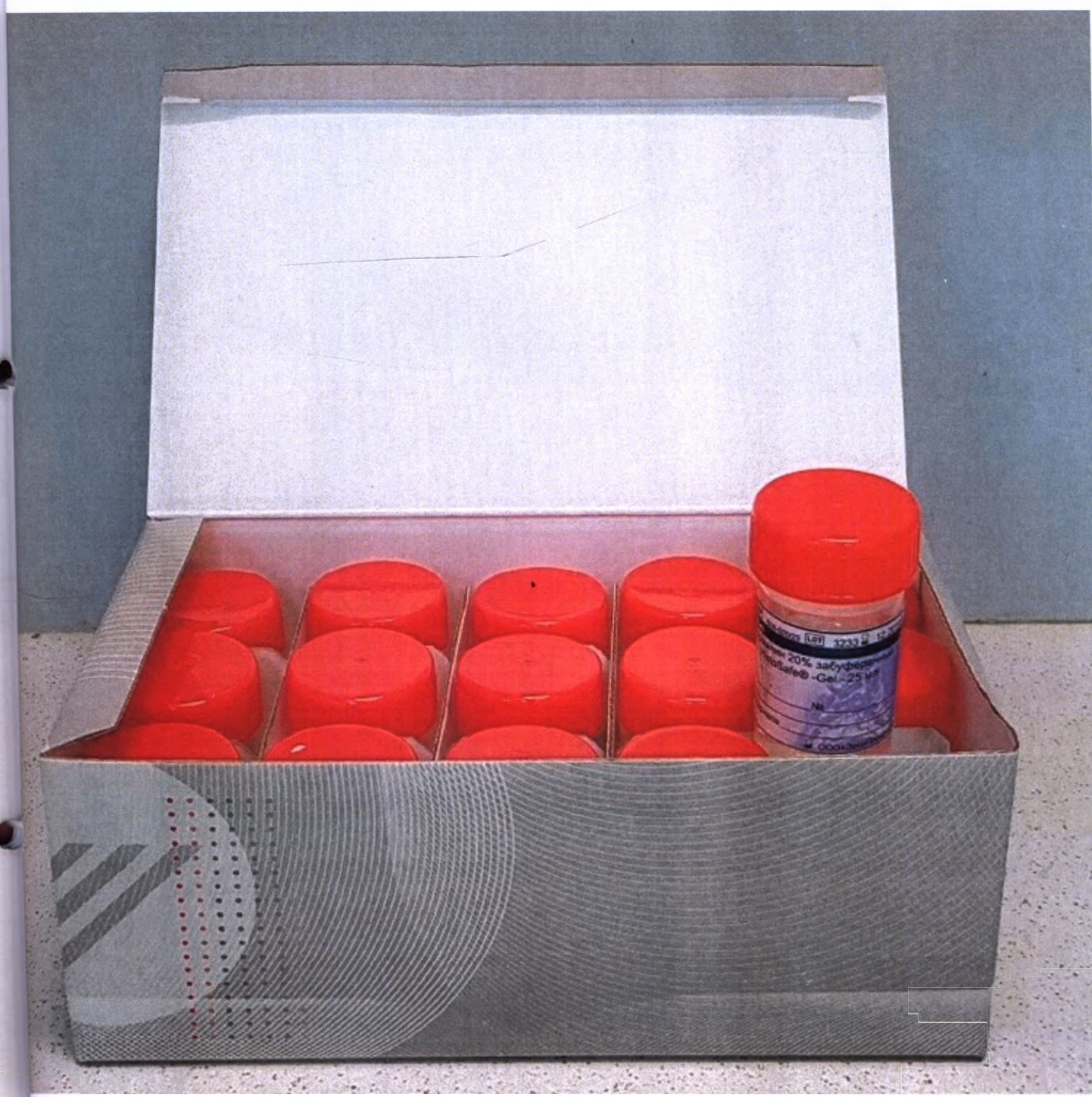

BiVitrum

www.biovitrum.ru

IVD REF B06-020/25

По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.



BiVitrum


Формалин 20% забуференный HistoSafe® -Gel - 25 мл (15 шт)

LOT 3233

12.2017

12.2019

PU Nxxxxxx

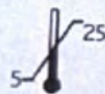


Состав: формалин, вода, фосфаты натрия, метилцеллюлоза

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.



ООО "ЭпроПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru

Фото 23. Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel - 75 мл (12 шт), первичная упаковка

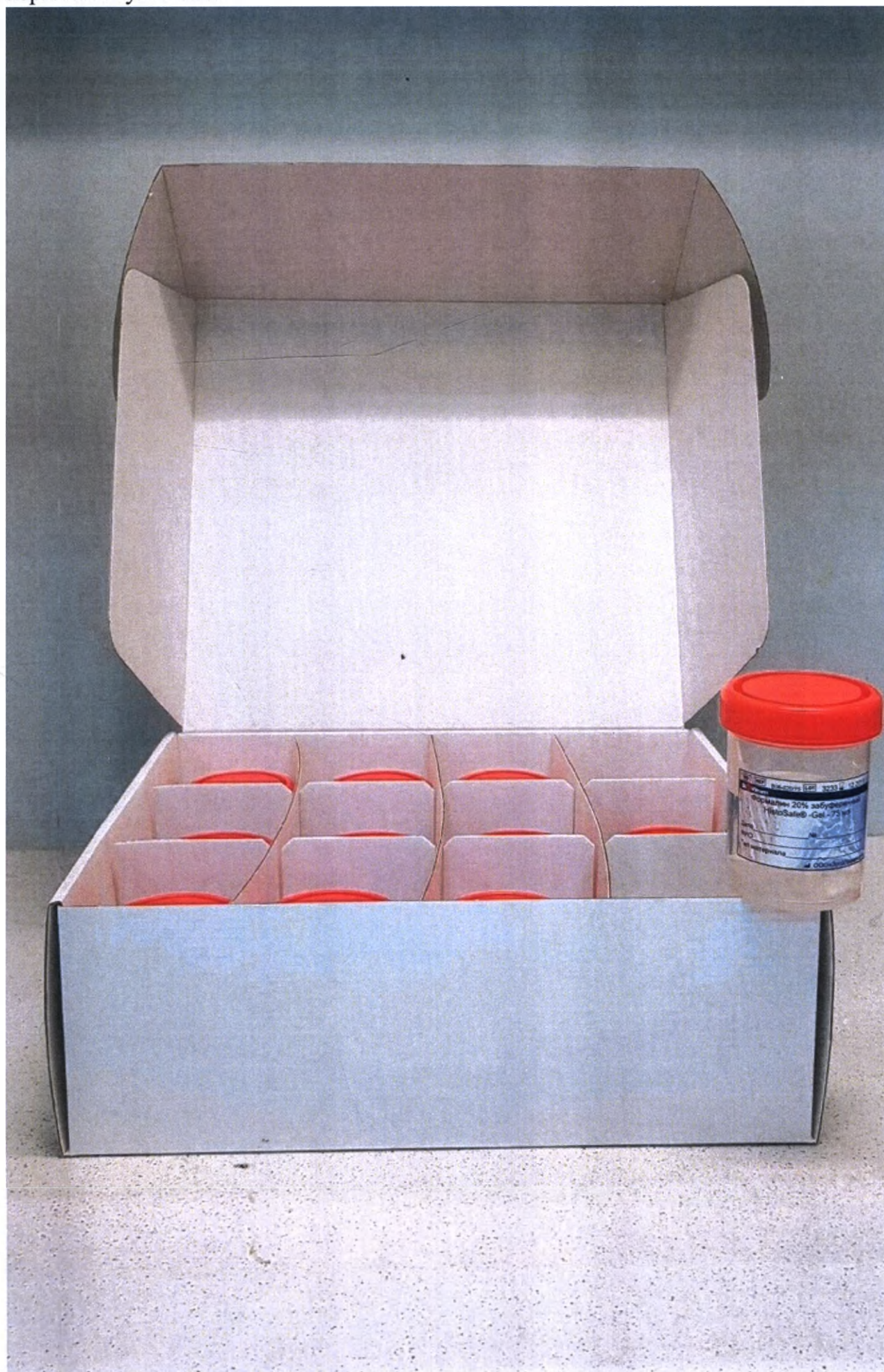




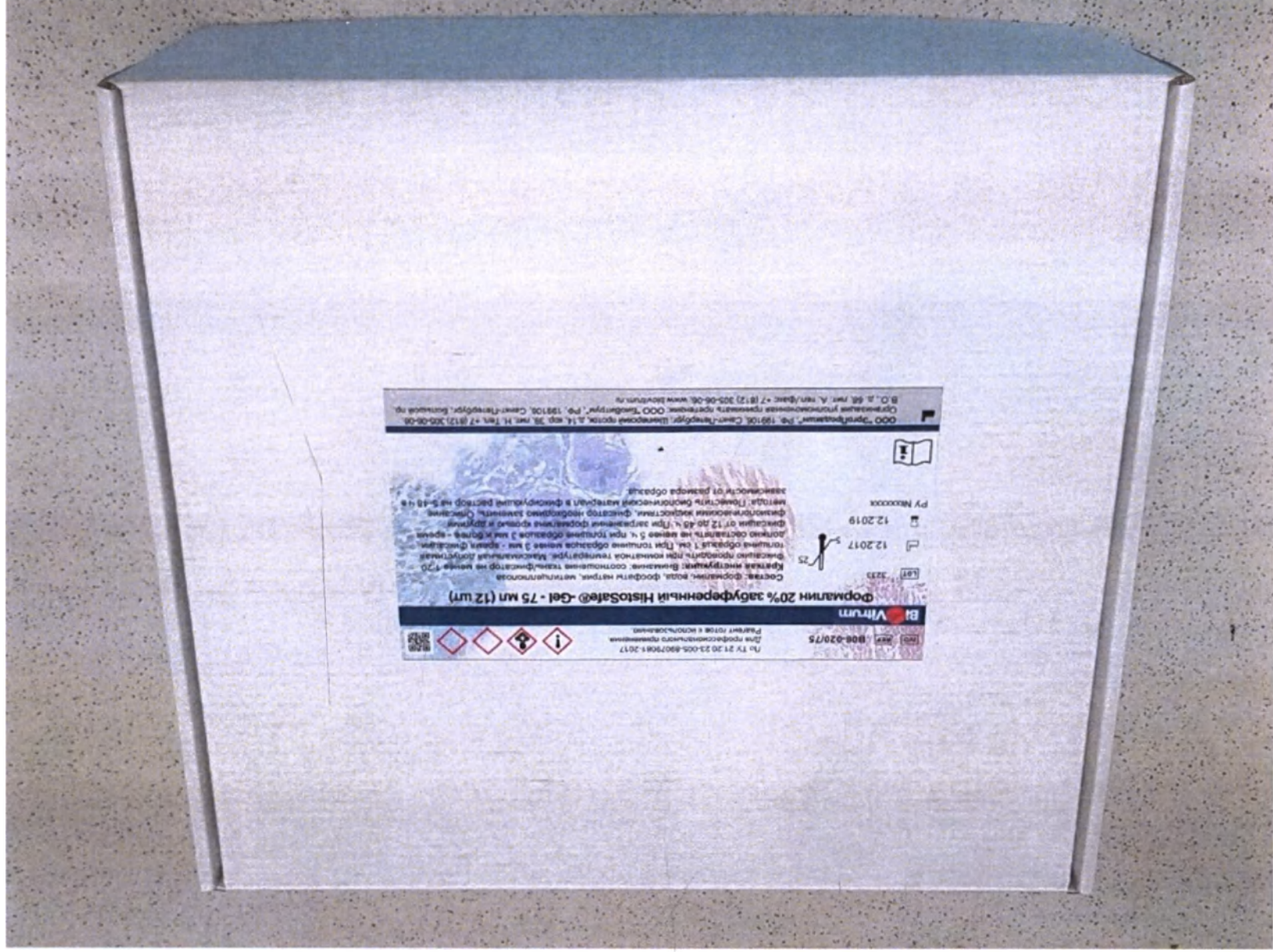


Фото 24. Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel - 75 мл (12 мкм), в/л. Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel - 75 мл (12 мкм), в/л. Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel - 75 мл (12 мкм), в/л.

Фото 25. Формалин 20% забуференный HistoSafe®-Gel - 250 мл (4 шт), первичная упаковка

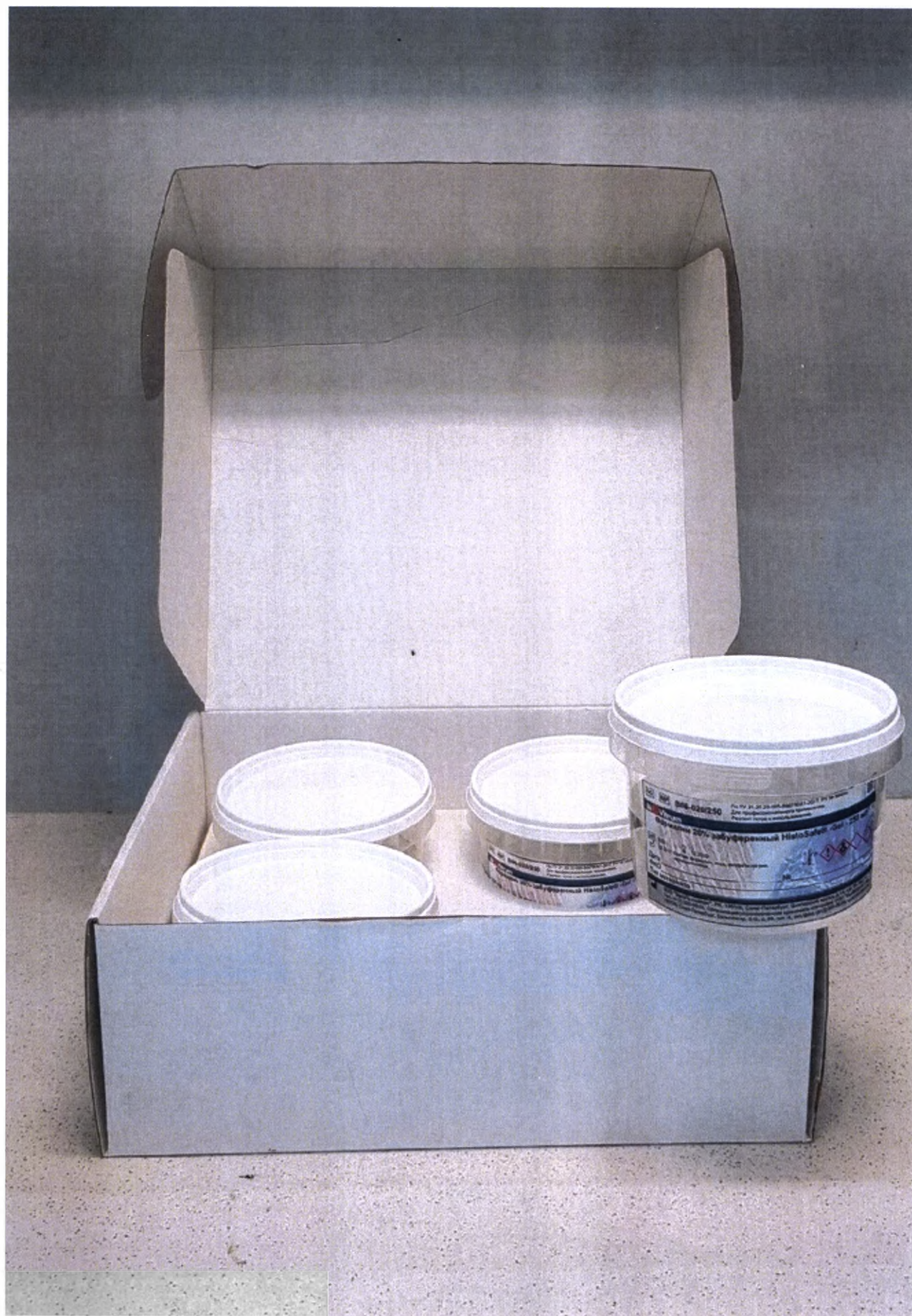

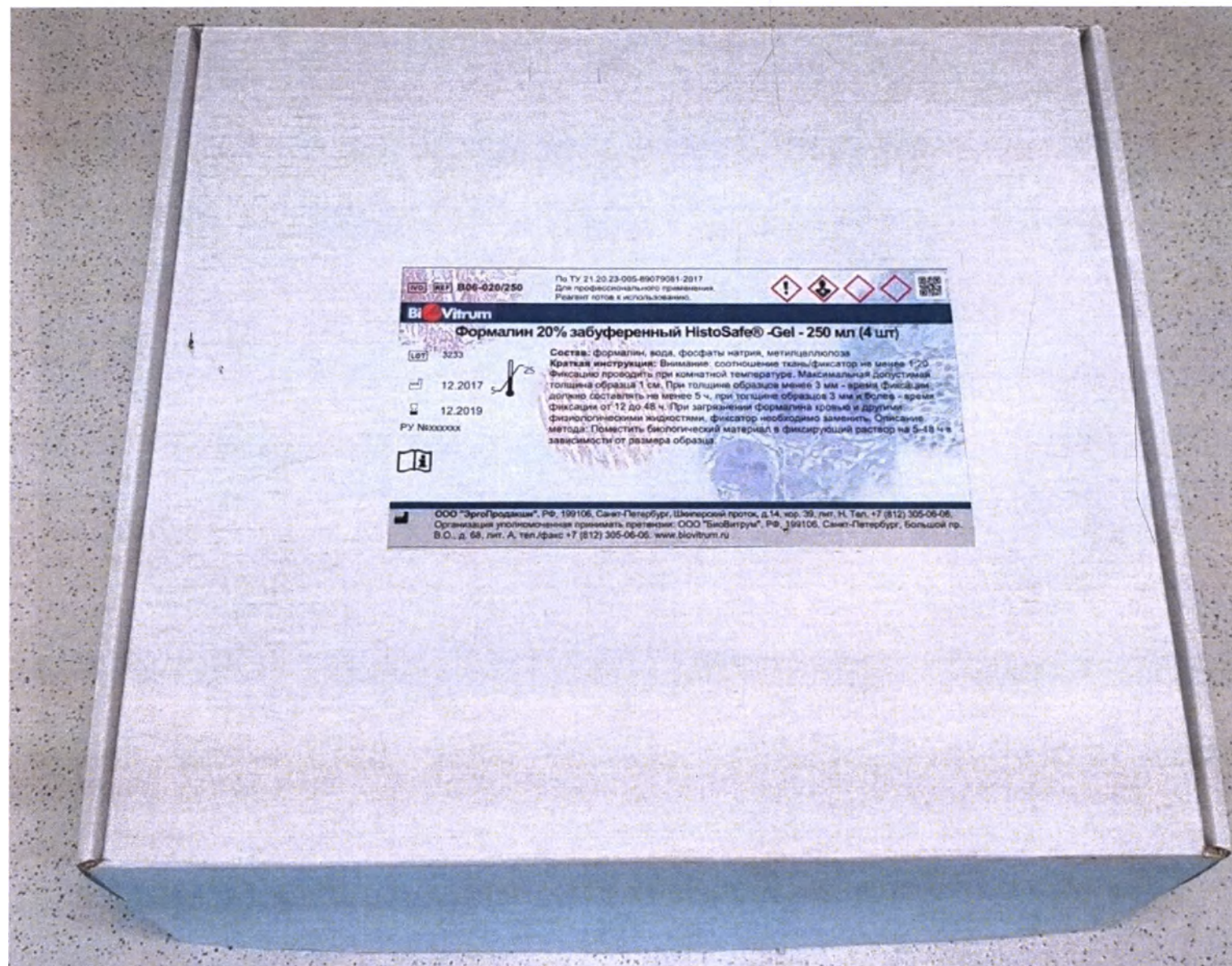

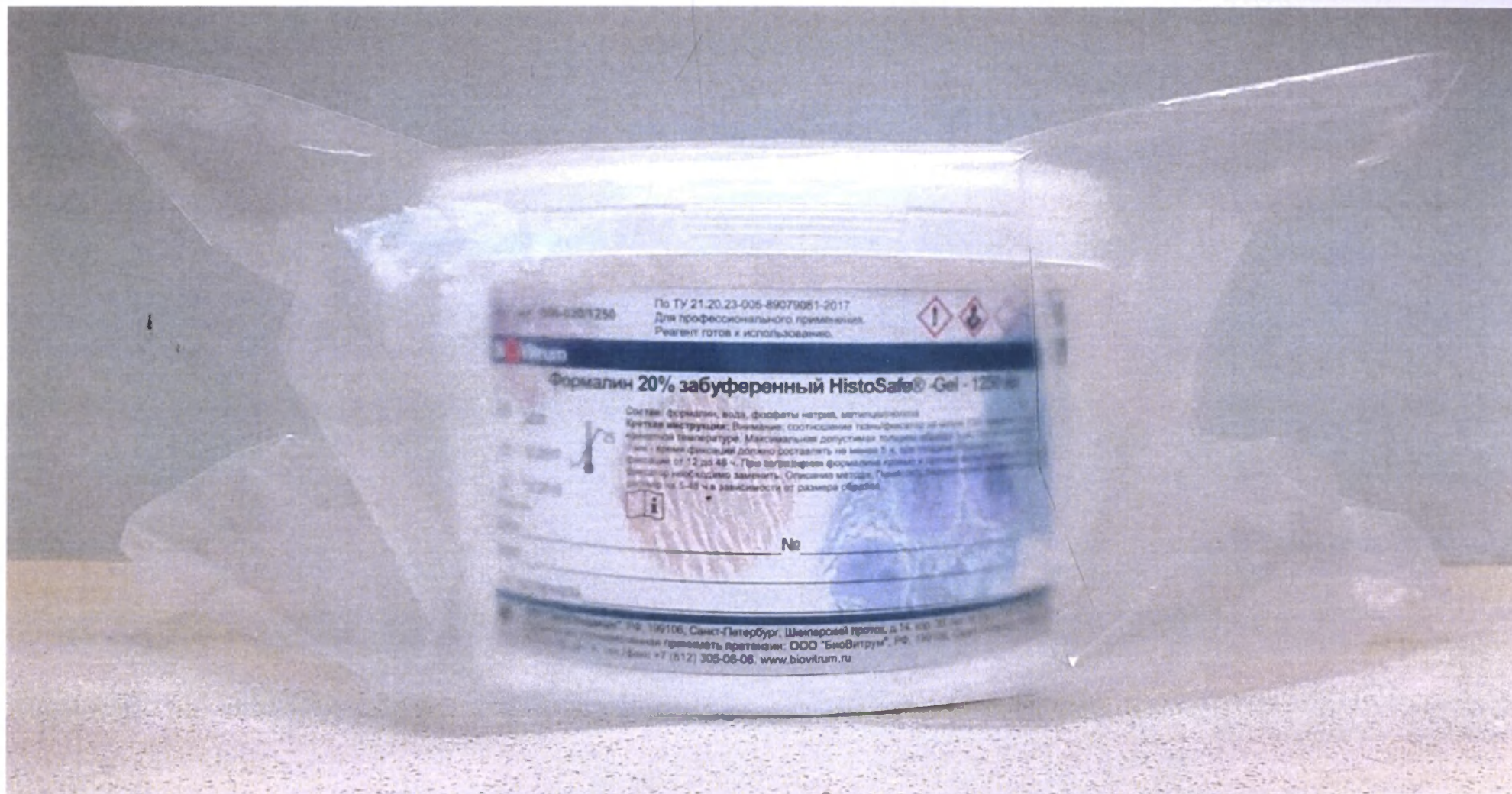



BioVitrum
www.biovitrum.ru

IVD REF B06-021/S

БиоВитрум

**Формалин 20% забуференный
HistoSafe® Миллонига - 1 л**

По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
РУ № xxxxxx

LOT 3231
12.2017
12.2019

Состав: формалин,
вода, натрий
хлористый, фосфаты
натрия

5 25

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А,
тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 30. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига - 1 л, обратная сторона



Фото 31. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 2,5 л, (Вариант фасовки № 1)

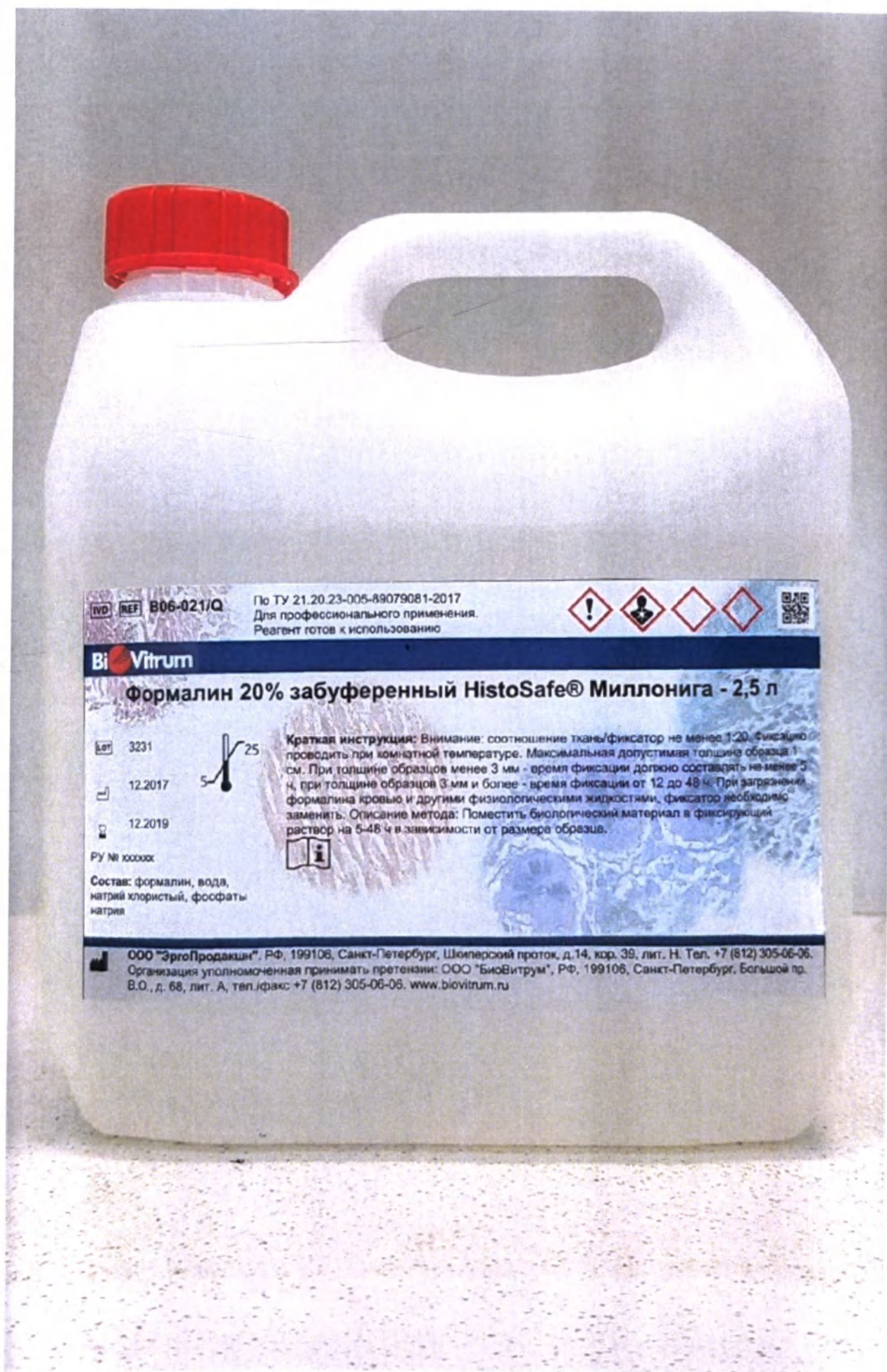


Фото 31а. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 2,5 л
(Вариант фасовки №2)



Фото 32. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 5 л, (Вариант фасовки № 1)

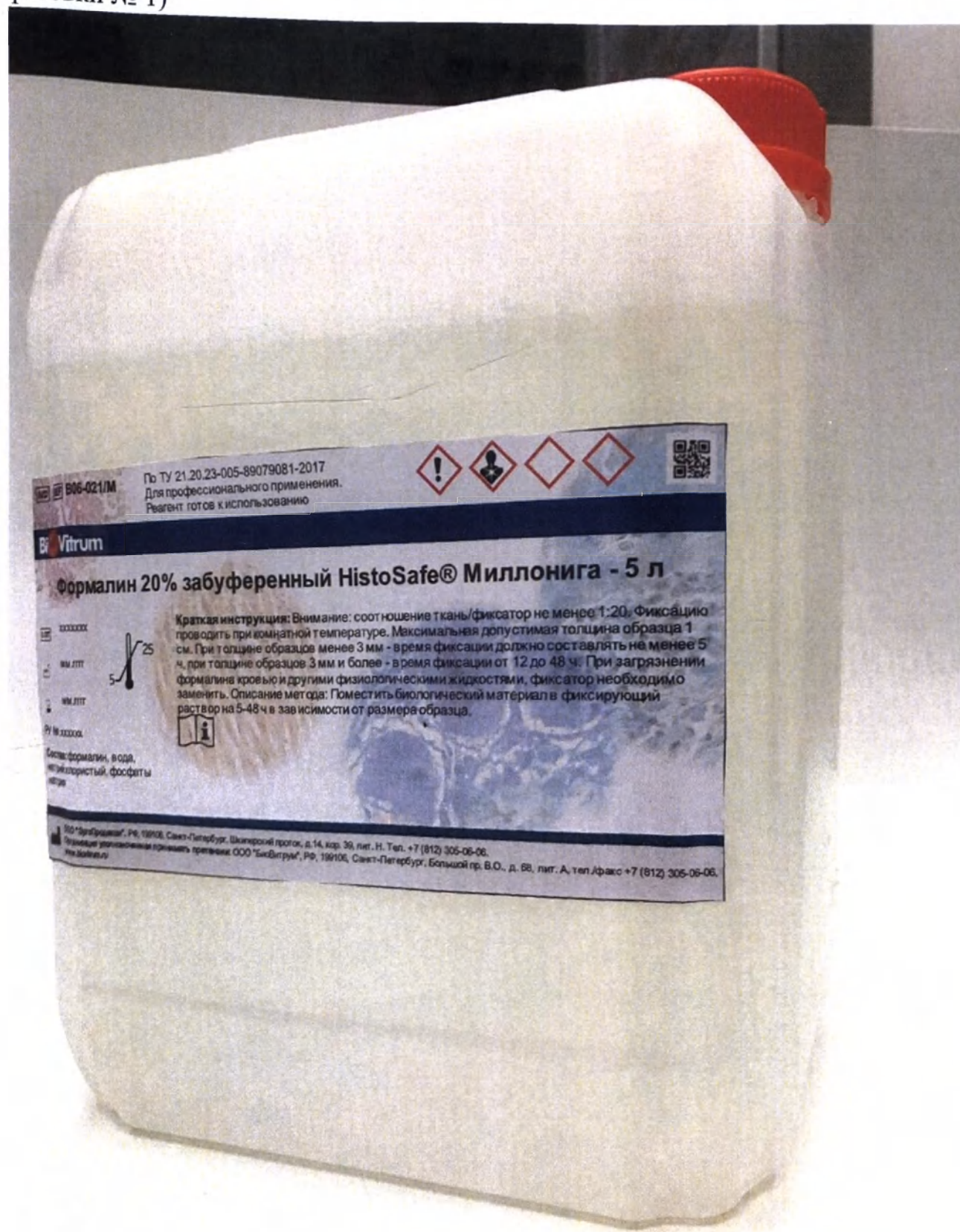


Фото 32а. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 5 л (Вариант фасовки №2)

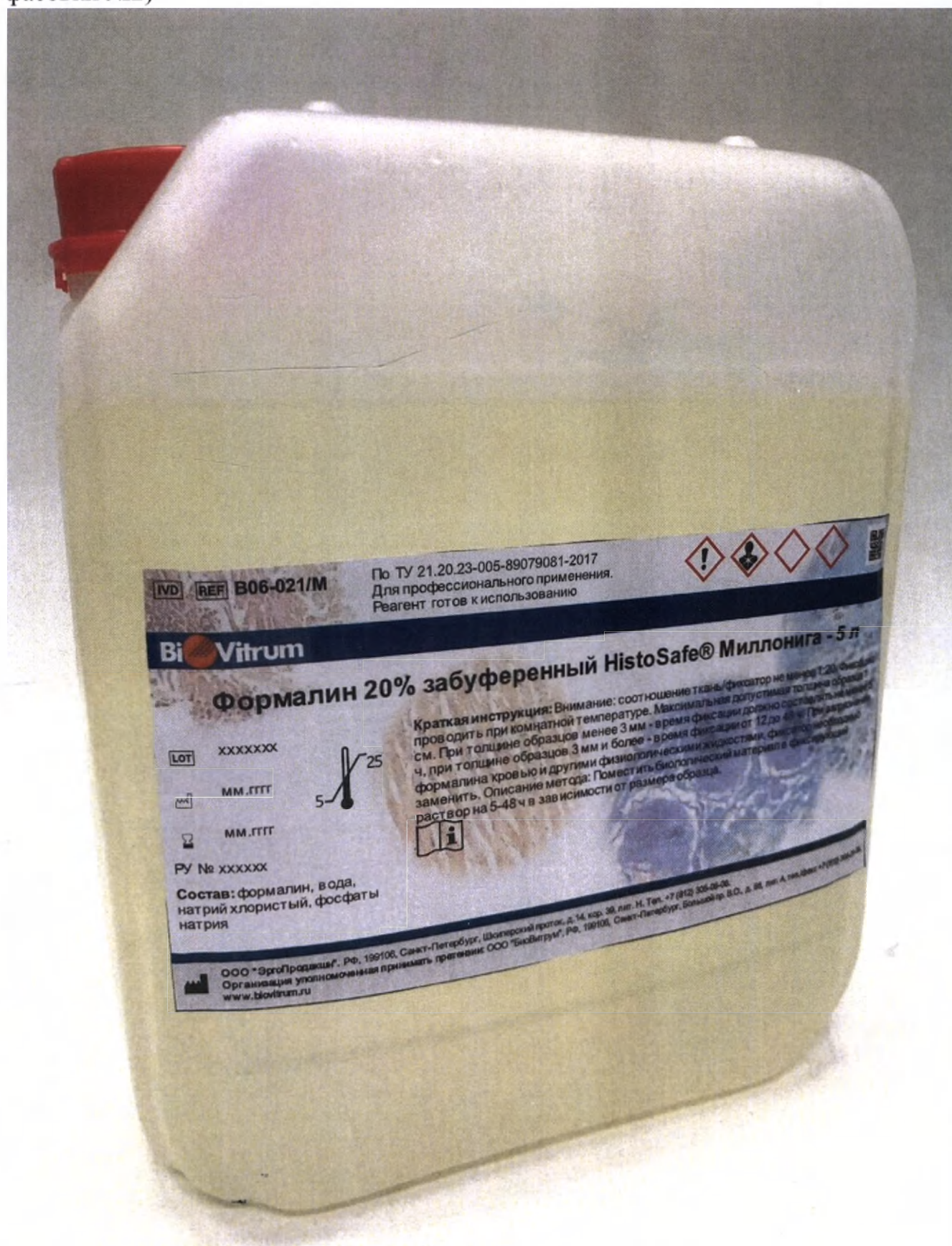


Фото 33. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 10 л, (Вариант фасовки № 1)

ИД	REF	B06-021/L	По ТУ 21.20.23-005-89079081-2017 Для профессионального применения Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига - 10 л					
3231 12.2017 12.2019 РУ № xxxxxx Состав: формалин, вода, натрий хлористый, фосфаты натрия		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образца менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При закреплении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шохерский проток, д.14, кор.39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БисВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А. тел./факс +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru					

Фото 33а. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 10 л (Вариант фасовки №2)

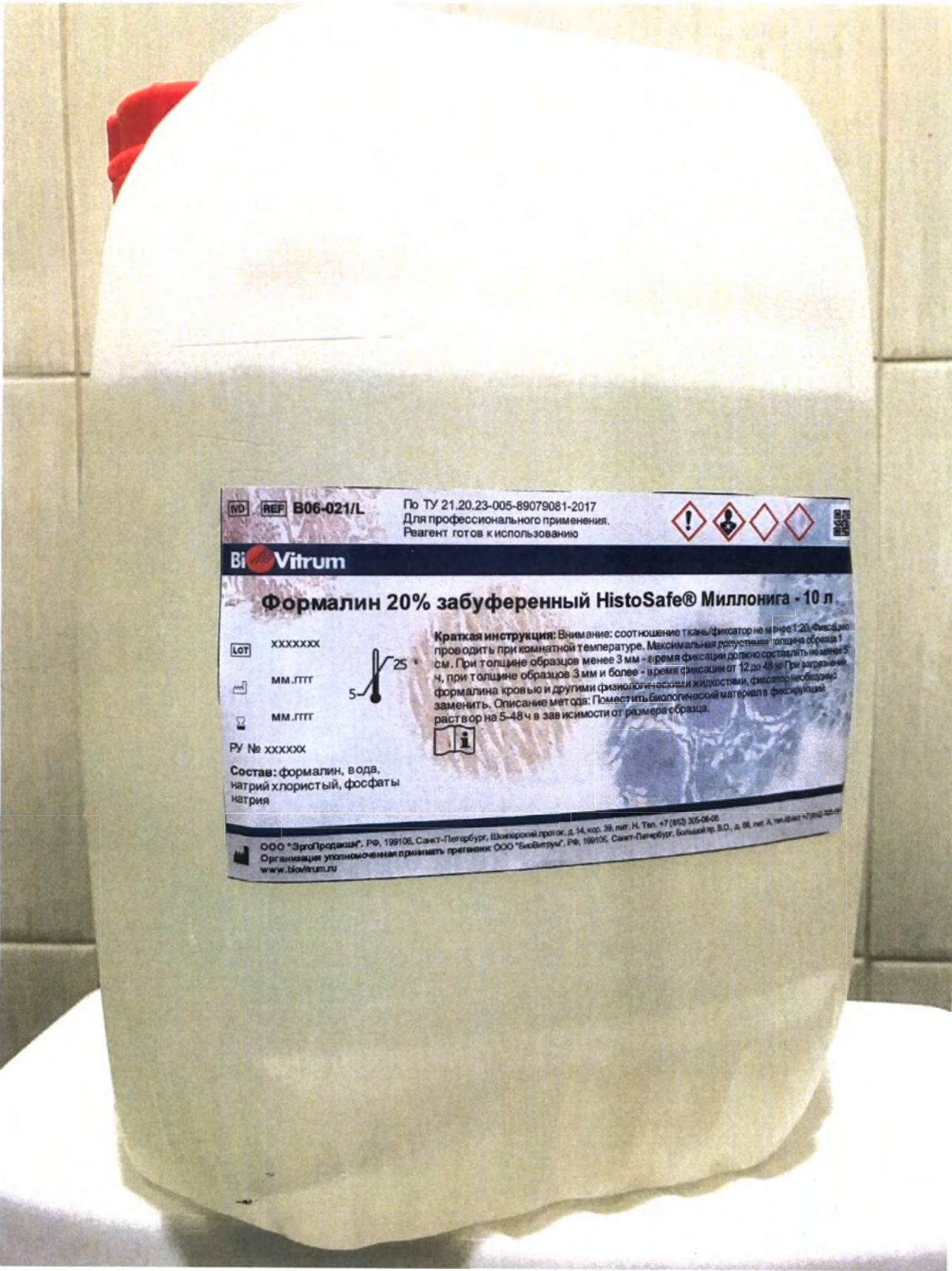


Фото 34. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 20 л, (Вариант фасовки № 1)


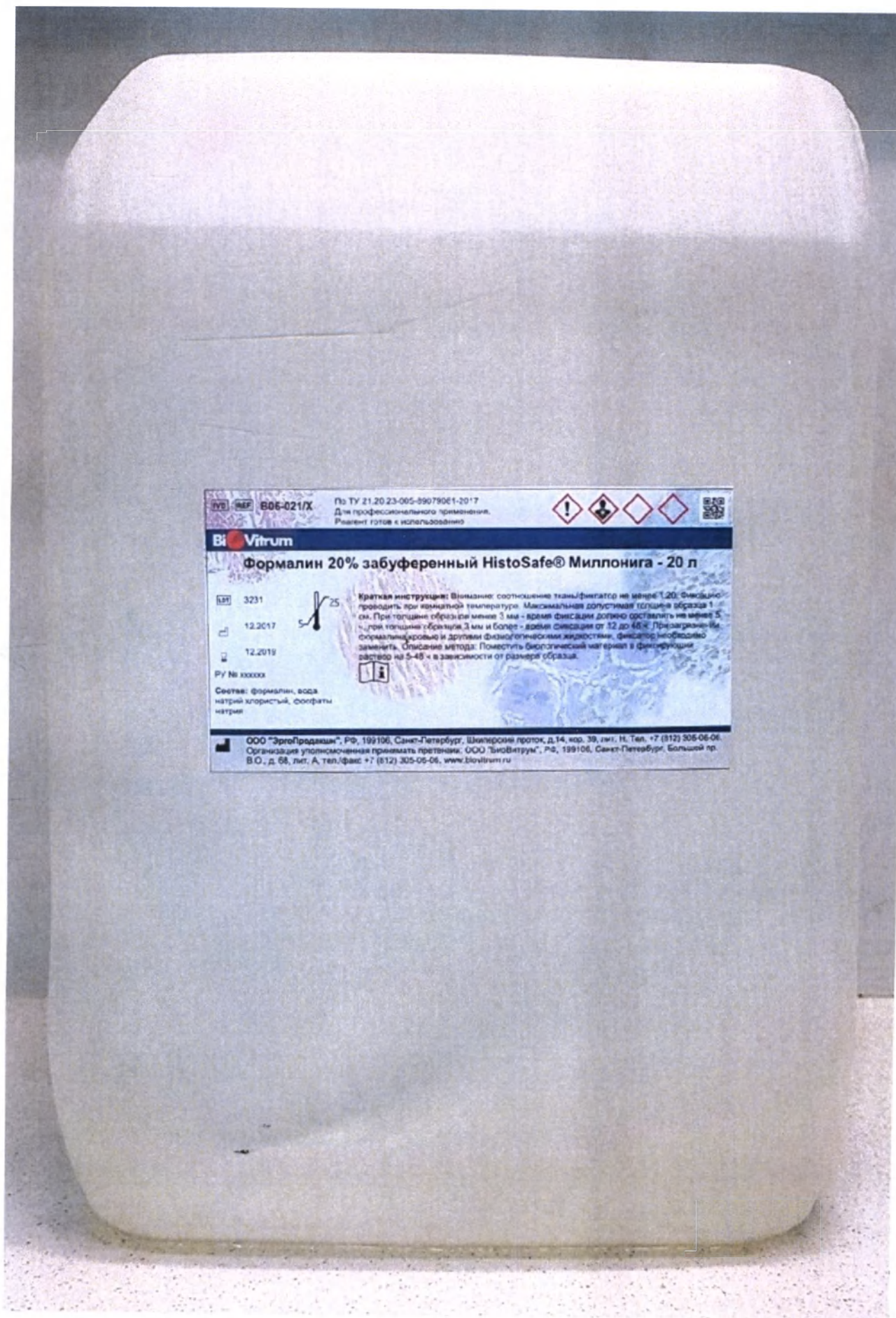


Фото 34а. Формалин 20% забуференный HistoSafe® Миллонига – 20 л (Вариант фасовки №2)

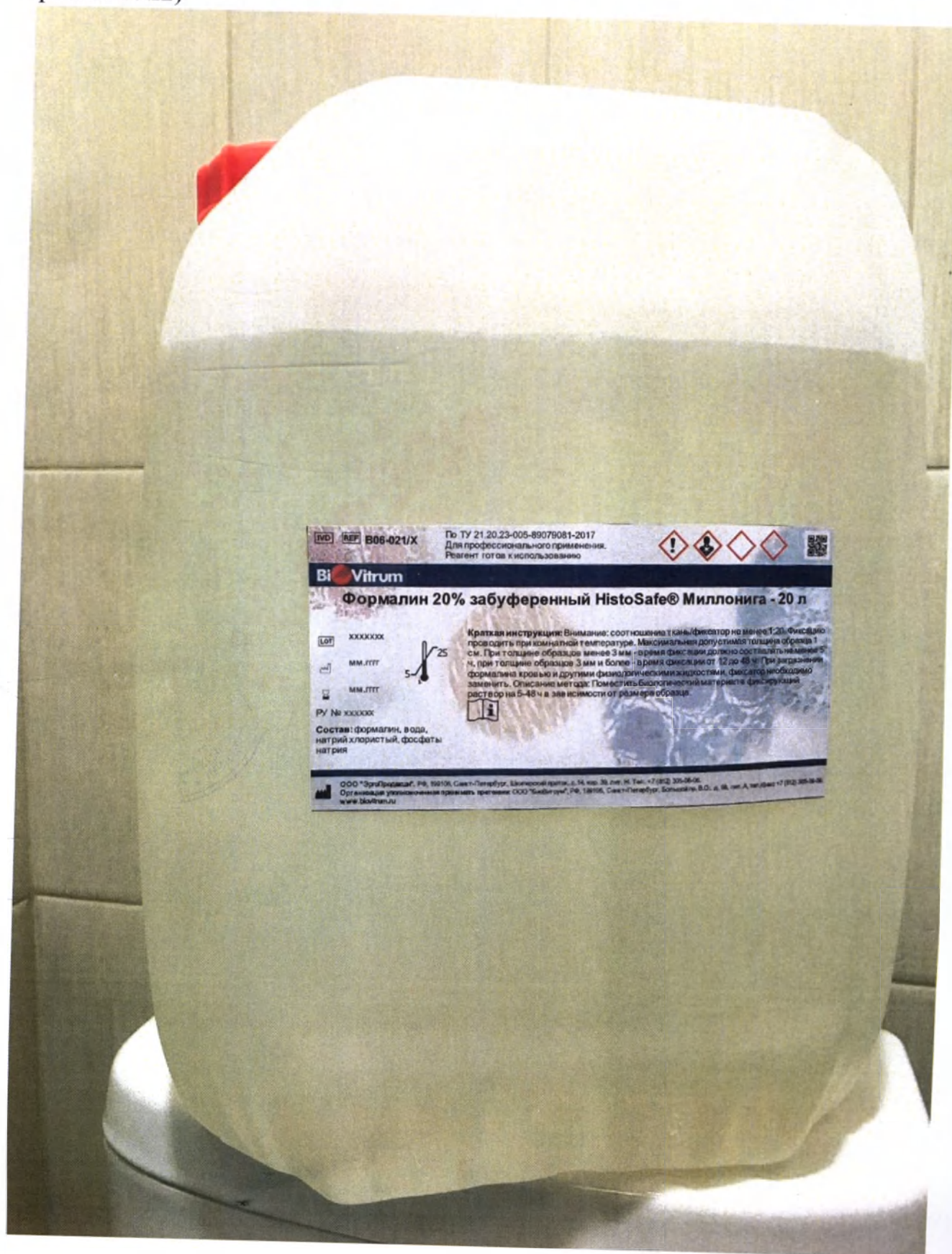

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 46
(Оригинал) лист(ов)
Генеральный директор
ООО "ЭргоФарм" 
" 7 " августа 2021г.
Д.В. Усейнов