

3. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

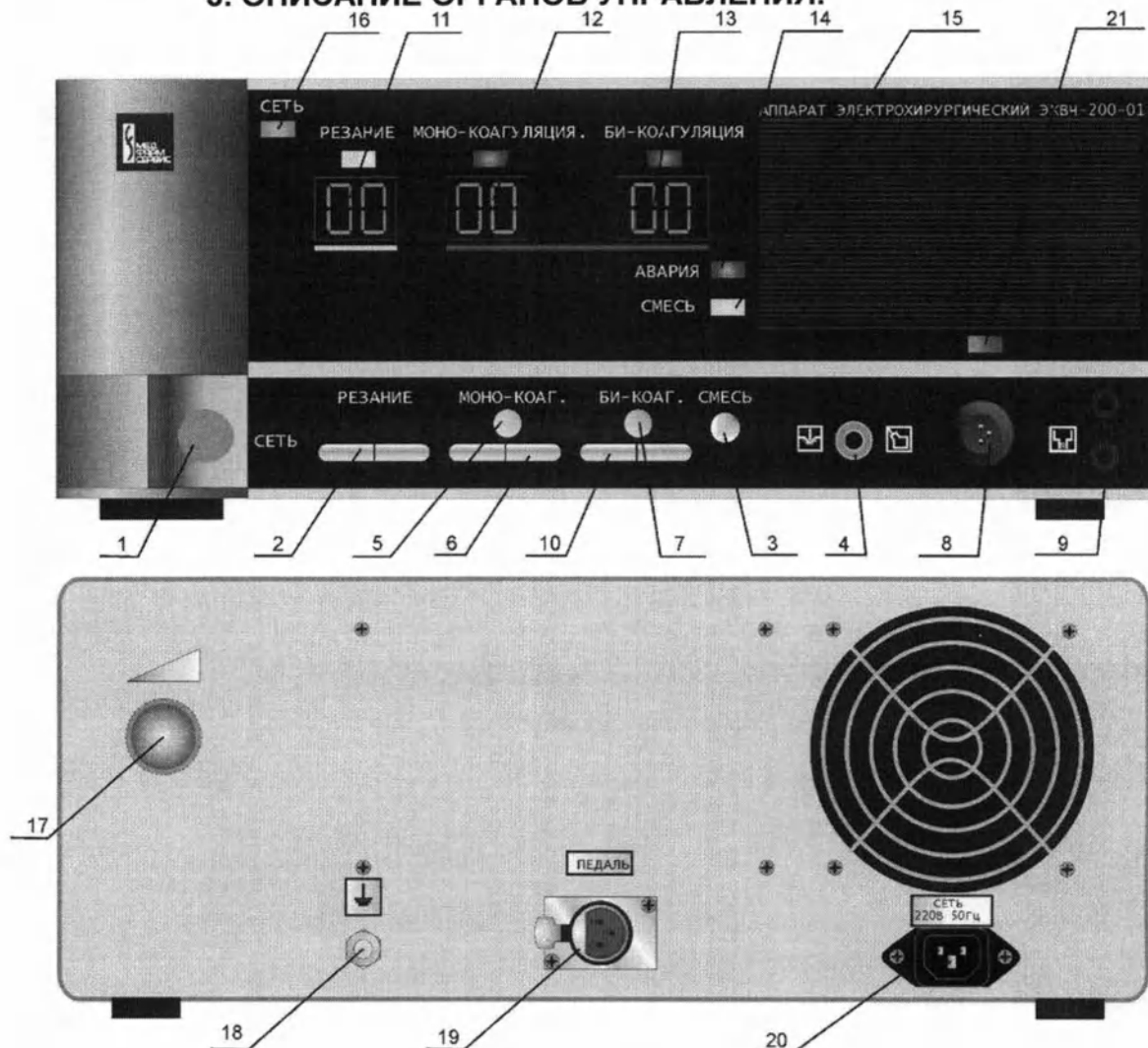


Рис.1

Конструктивно электрохирургический аппарат выполнен в виде настольного прибора.

На передней панели электрохирургического аппарата расположены:

1. Сетевой выключатель.
2. Кнопки установки выходной мощности в монополярных режимах "Резание" и "Смесь".
3. Кнопка переключения монополярных режимов "Резание / Смесь".
4. Разъем для подключения кабеля активного электрода.
5. Кнопка перевода аппарата в режим "Монополярная коагуляция".
6. Кнопки установки выходной мощности в режиме "Монополярная коагуляция".
7. Кнопка перевода аппарата в режим "Биполярная коагуляция".
8. Разъем для подключения кабеля пассивного электрода.