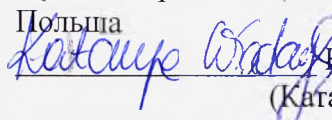


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

IQDENT Sp. z o. o. (ООО Айкьюдент),

Польша

 Katarzyna Włodarczyk
(Катажина Влодарчик)

« 18 » 04 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ры стоматологические IQDENT, производства IQDENT Sp. z o. o. (ООО Айкьюдент), Польша

REPERTORIUM A Nr

2098/2018

1. Описание изделия

1.1 Назначение медицинского изделия

Боры стоматологические предназначены для подготовки, обработки и полировки ткани зуба (эмали), дентина и композитов, используемых в стоматологии.
Боры являются инструментом многократного использования, при этом с учетом безопасности срок службы продукции ограничен 10-кратной стерилизацией

Область применения медицинского изделия – стоматология.

Условия эксплуатации.
В специализированных (стоматологических) лечебных учреждениях.
При нормальных условиях (температура от 15 до 30°C).

Показания к применению.
- зубной кариес.
- частичная или полная адентия зубов человека

Противопоказания к применению.
Отсутствуют.

Побочные эффекты при применении.
При применении изделия согласно инструкции по применению побочных эффектов не выявлено.

Меры предосторожности при применении.
Данные изделия могут быть использованы только квалифицированным персоналом. Неправильное использование изделий может привести к повреждению компонентов системы и/или нанесению вреда пациенту.

1.2 Применение и состав

Боры стоматологические изготовлены из нержавеющей стали и/или карбида вольфрама. На некоторые инструменты нанесено алмазное покрытие. Боры из карбида вольфрама имеют прямые или спиральные режущие кромки.

Боры стоматологические алмазные изготовлены из следующих материалов:

Наименование материала	Производитель
Сталь 1.4035	Platestahl Umformtechnik GmbH Platehofstraße 1 58513 Lüdenscheid Германия
Искусственный алмаз RVD-P	CERATONIA Reiner Dämpert Diamanten & Systeme e.K. An der Lohwiese 29 97500 Ebelsbach, Германия
Никель	CHEMIA – ŁÓDŹ

	91-341 Łódź, ul. Brukowa 27, Польша
--	--

Боры стоматологические твердосплавные изготовлены из следующих материалов:

Наименование материала	Производитель
Карбид вольфрама	Sandvik Tollng Deutschland GmbH Business Area Sandvik Hyperion Heerdter Landstrasse 243 D-40549 Düsseldorf Германия
Сталь 1.4035	Platestahl Umformtechnik GmbH Platehofstraße 1 58513 Lüdenscheid Германия
Серебро	Umicore AG & Co. KG in Hanau Rodenbacher Chaussee 4 D-63457 Hanau-Wolfgang Германия

1.3 Способ применения медицинского изделия

Откройте упаковку, простерилизуйте бор стоматологический. Вставьте его в отверстие бормашины, удерживая кнопку блокировки.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- пользуйтесь исключительно эффективными приборами с угловыми, прямыми и турбинными наконечниками;
- зафиксируйте бор в соответствии с наконечником бора;
- зафиксируйте бор, учитывая соосность, насколько это возможно; избегайте контакта вращающегося устройства с поверхностью наконечника бора;
- проверьте рекомендуемое количество оборотов в минуту и, если невозможно набрать указанное количество оборотов, замените бор;
- рекомендуется надевать при работе защитные очки.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

- устанавливайте меньшую скорость вращения при пользовании борами большого диаметра
- нажимайте на длинные боры с меньшей силой

ОХЛАЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ:

- следует использовать охлаждающую жидкость в виде спрея. Данное требование относится к турбинным и угловым наконечникам.
- охлаждение способствует предотвращению перегревания зубов и инструментов;
- если следовать руководству по эксплуатации, инструменты прослужат дольше и побочные эффекты не возникнут.

1.3.1 Рекомендуемое контактное усилие:

- максимальное давление 0,3-2 Н;
- при рекомендованном давлении инструменты сохраняют первоначальную форму, не повреждая опору наконечника бора;
- при рекомендованном моменте затяжки не повреждаются ткани.

1.3.2 Скорость вращения

Максимальное количество оборотов в минуту определяется не только внешними факторами, но и силой вибраций. По этой причине не рекомендуется превышать максимальное количество оборотов в минуту. Подобное превышение может привести к неисправности наконечника. Минимальное количество оборотов в минуту ограничивает эффективность процедуры. При скорости, которая ниже заданной, устройством не обеспечиваются стандартные характеристики производительности.

Максимальная скорость вращения					
Турбинный наконечник (хвостовики: 313, 314)		Турбинный наконечник (хвостовик 316)		Угловой и прямой наконечник (хвостовики: 104, 204, 205, 206)	
Диаметр бора ISO, ø 1/10 мм	об./мин.	Диаметр бора ISO, ø 1/10 мм	об./мин.	Диаметр бора ISO, ø 1/10 мм	об./мин.
006 - 010	450 000	008 - 010	300 000	005 - 021	40 000
012-014	450 000	012-014	300 000	023 - 045	40 000
016-018	450 000	016-018	300 000	050 - 060	12 000
021 - 023	300 000	021 - 023	300 000		
025 - 027	160 000				
029 - 031	140 000				
033 - 040	120 000				

1.3.3 Стерилизация продукта

Боры стоматологические упакованы в чистой среде.
Продукция поставляется нестерильной. Перед первым и каждым последующим использованием боры необходимо простерилизовать.

Очистка. Очистка может быть проведена методом ручного мытья в горячей воде с соответствующим дезинфицирующим средством с использованием пластиковых или нейлоновых щеток (использование металлических щеток запрещено). Допускается использование ультразвукового оборудования. После обработки необходимо проверить каждое изделие на отсутствие органических загрязнений. Изделия должны быть высушены после ополаскивания.

Дезинфекция, сушка, упаковка.

Порядок процедуры:

1. Приготовьте лоток с дезинфицирующим раствором согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства. (Например, Аламинол (Свидетельство о государственной регистрации: № 77.99.36.2.У.8061.8.06:концентрация рабочего раствора 8% или 80 мл на 1 л раствора).
3. Погрузите в лоток с дезинфицирующим раствором. Для определения длительности времени погружения воспользуйтесь инструкцией по применению дезинфицирующего средства (Например, для 8 %-ного раствора Аламинола рекомендуемое время погружения составляет 60 минут).
4. Извлеките изделие из дезинфицирующего раствора и ополосните его под струей проточной питьевой воды с температурой 15-25°С в течение 2-х минут.
4. Высушите изделие с помощью марлевой салфетки.

5. Сухое изделие поместите в крафт-пакет.

Стерилизация перед применением

Рекомендуемый метод стерилизации – паровой (автоклавирование).

Процедуру стерилизации должен проводить специально подготовленный специалист.

Рекомендуемый режим стерилизации:

– максимальная температура стерилизации: 134 °C/273,2 °F

– время стерилизации: минимум 20 минут при температуре 121 °C/250 °F, либо 5 минут при температуре 134 °C/273,2 °F.

– максимум 10 циклов стерилизации.

Простерилизованное изделие готово к применению.

Хранение стерилизованных потребителем изделий.

Стерилизованные потребителем изделия храните в стерилизационных пакетах в чистом, сухом, обеспыленном помещении при температуре от +15 до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, избегая воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

Срок сохранения стерильности зависит от типа используемой упаковки для финишной стерилизации, согласно рекомендациям изготовителя упаковки.

Компания IQ dent подтверждает, что процесс дезинфекции, чистки и стерилизации, указанный выше, обеспечивает возможность использования медицинского изделия в соответствии с его назначением.

Стальные и твердосплавные боры для обработки не должны показывать никаких видимых признаков коррозии или износа, если они прошли эти процессы в соответствии с инструкциями.

1.4 Основные технические параметры и характеристики медицинского изделия


В зависимости от формы и размеров хвостовика боры стоматологические могут быть предназначены для углового, прямого или турбинного наконечника.

Боры стоматологические IQ dent совместимы с любыми марками/производителями стоматологических наконечников, соответствующими стандартам:
ISO 7785-1:1997

- 1) ISO 7785-1:1997 Dental handpieces. Part 1. High-speed air turbine handpieces (идентичен ГОСТ ISO 7785-1-2011. Стоматологические наконечники. Часть 1. Высокоскоростные пневматические турбинные наконечники).
- 2) ISO 7785-2:199 Dental handpieces - Part 2: Straight and geared angle handpieces (идентичен ГОСТ ISO 7785-2-2011 Стоматологические наконечники. Часть 2. Прямые и угловые наконечники).


Для углового наконечника предназначен хвостовик типа 1, кодовый номер 20:

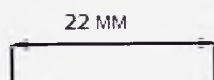Стандартный 204




Ø 2,35 мм

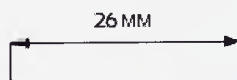Длинный 205



Ø 2,35 мм

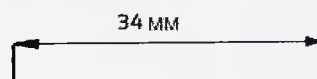
Экстрадлинный 206



Ø 2,35 мм

Для прямого наконечника предназначен хвостовик типа 2, кодовый номер 10:

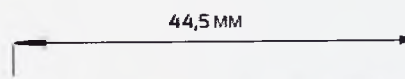
Стандартный 104



Ø 2,35 мм

Для турбинного наконечника предназначен хвостовик типа 3, кодовый номер 31:

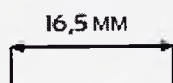Короткий 313




Ø 1,6 мм

Стандартный 314



Ø 1,6 мм

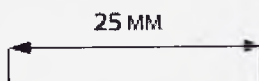Экстрадлинный 316












Ø 1,6 мм
















ТИП наконечника	Общая длина бора (мм) ±0,5 мм	Диаметр стержня бора (мм)	Диаметр рабочей части бора (мм)
Турбинный наконечник для алмазных боров	16,5—25	1,6	0,7—3,5
Угловой наконечник для алмазных боров	22—34	2,35	1,0—3,5
Прямой наконечник для алмазных боров	44,5	2,35	0,9 – 6,0
Турбинный наконечник для твердосплавных боров	19—25	1,6	0,6—2,3
Угловой наконечник для твердосплавных боров	22—34	2,35	0,5—2,9
Прямой наконечник для твердосплавных боров	44,5	2,35	1,0—2,3













1.4.1 Формы и конструкции боров стоматологических

Боры стоматологические алмазные и твердосплавные имеют следующие формы рабочей части:









Форма и конструкция	Описание	Кодовый номер	Вид бора стоматологического
	Сферическая (круглая)	001	алмазный и твердосплавный
	Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	002	алмазный
	Сферическая длинная шейка	004	алмазный и твердосплавный
	Обратноконусная	010	алмазный и твердосплавный
См. 010	$15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$	012	алмазный
	Обратноконусная с бурти- ком	019	алмазный
	Цилиндрическая (форма), резание боковое и конце- вое	107	твердосплавный
См. 107	$l \leq 3,5 \text{ мм}$	108	алмазный
См. 107	$5,5 < l \leq 7,5 \text{ мм}$	110	алмазный и твердосплавный
См. 107	$7,5 < l \leq 9,5 \text{ мм}$	111	алмазный
См. 107	$9,5 < l \leq 11,5 \text{ мм}$	112	алмазный

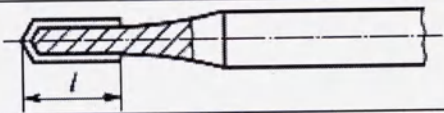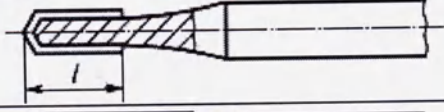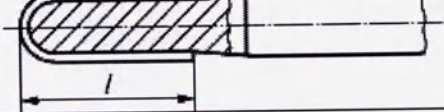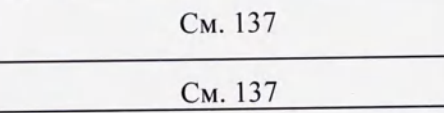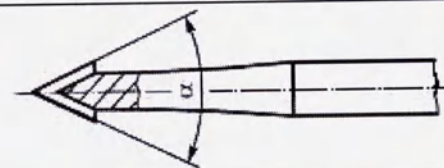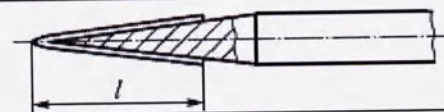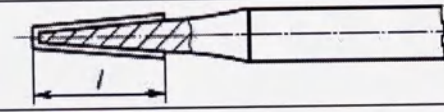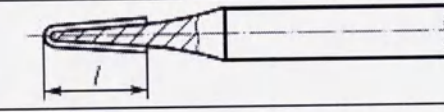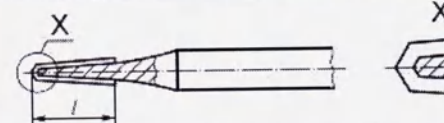См. 107		$11,5 < l \leq 13,5$ мм	113	алмазный
		Цилиндрическая, острый конец $7,5 < l \leq 9,5$ мм	130	алмазный
		Цилиндрическая, острый конец $9,5 < l \leq 11,5$ мм	131	алмазный
		Цилиндрическая, полу- сферический конец	137	твердосплавный
См. 137		$l \leq 3,5$ мм	138	алмазный и твердосплавный
См. 137		$3,5 < l \leq 5,5$ мм	139	твердосплавный
См. 137		$5,5 < l \leq 7,5$ мм	140	алмазный
См. 137		$7,5 < l \leq 9,5$ мм	141	алмазный
См. 137		$9,5 < l \leq 11,5$ мм	142	алмазный
		Конусная, заостренная $\alpha \leq 10^\circ$	160	алмазный
		Конусная, заостренная, тонкая $3,5 < l \leq 6,5$ мм	164	алмазный и твердосплавный
См. 164		$6,5 < l \leq 8,5$ мм	165	алмазный
См. 164		$8,5 < l \leq 10,5$ мм	166	алмазный и твердосплавный
		Конусная, (усеченная ко- нусная)	168	твердосплавный
См. 168		$l \leq 3,5$ мм	169	алмазный
См. 168		$5,5 < l \leq 7,5$ мм	171	алмазный и твердосплавный
См. 168		$7,5 < l \leq 9,5$ мм	172	алмазный
См. 168		$9,5 < l \leq 11,5$ мм	173	алмазный
См. 168		$11,5 < l \leq 13,5$ мм	174	алмазный
		Конусная, куполообраз- ный (полусферический) конец	194	твердосплавный
См. 194		$l \leq 3,5$ мм	195	твердосплавный
См. 194		$5,5 < l \leq 7,5$ мм	197	алмазный
См. 194		$7,5 < l \leq 9,5$ мм	198	алмазный
См. 194		$9,5 < l \leq 11,5$ мм	199	алмазный
		Конусная, острый конец $7,5 < l \leq 9,5$ мм	210	твердосплавный

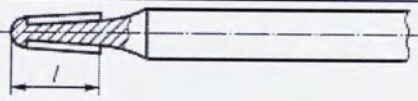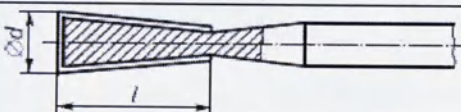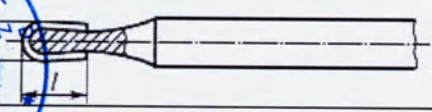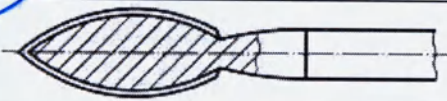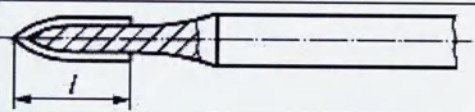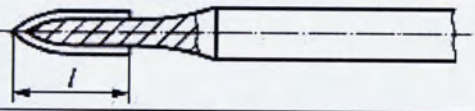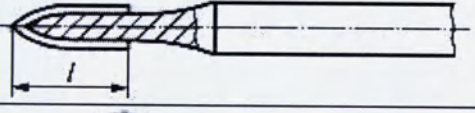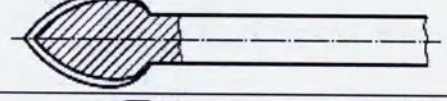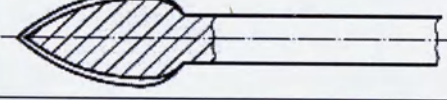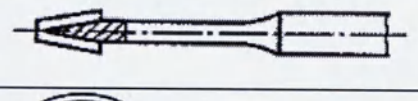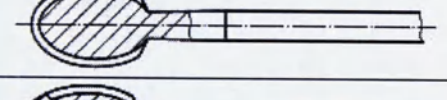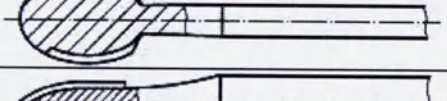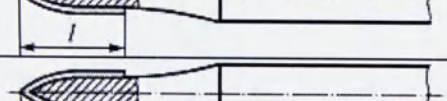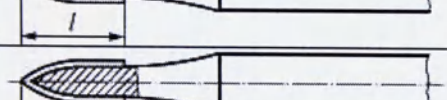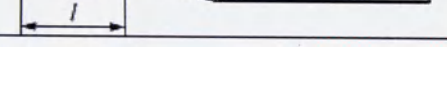	Конусная, куполообразный конец, только боковое резание $9,5 < l \leq 11,5$ мм	220	алмазный
	Обратноконусная $d < l \leq 3d$	225	алмазный
	Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	232	алмазный и твердосплавный
	Груша $d < l \leq 3d$	237	алмазный
См. 237	Груша $3d < l$	238	алмазный и твердосплавный
	Пламя, стандартная	243	алмазный
	Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная $7,5 < l \leq 9,5$ мм	249	алмазный и твердосплавный
	Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная $9,5 < l \leq 11,5$ мм	250	алмазный
	Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная $11,5 < l \leq 13,5$ мм	251	алмазный
	Почка	254	алмазный и твердосплавный
	Почка, тонкая	257	алмазный
	Конусная длинная шейка	265	твердосплавный
	Яйцо	277	алмазный и твердосплавный
	Боковое резание	279	твердосплавный
	Торпеда цилиндрическая $5,5 < l \leq 7,5$ мм	288	алмазный
	Торпеда цилиндрическая $7,5 < l \leq 9,5$ мм	289	алмазный и твердосплавный
	Торпеда цилиндрическая $9,5 < l \leq 11,5$ мм	290	алмазный и твердосплавный

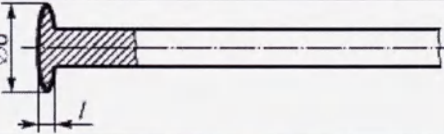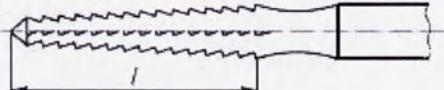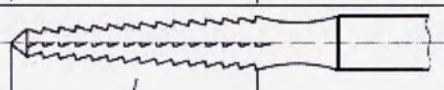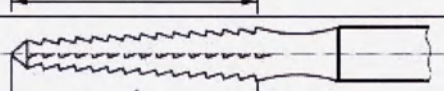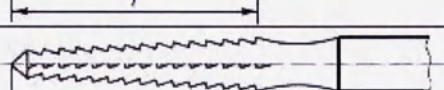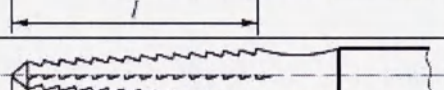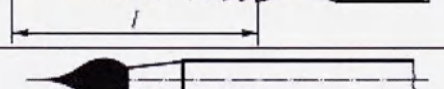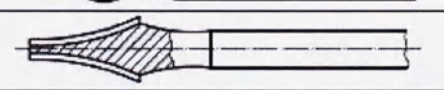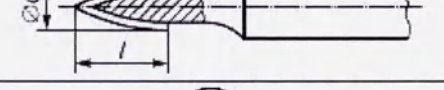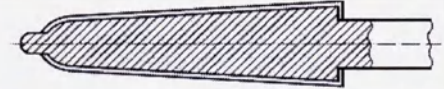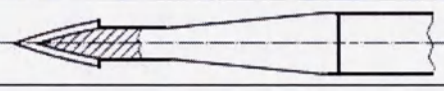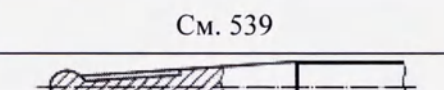	Торпеда цилиндрическая $11,5 < l \leq 13,5$ мм	291	алмазный
	Торпеда конусная $l \leq 3,5$ мм	295	алмазный
	Торпеда конусная $9,5 < l \leq 11,5$ мм	299	алмазный
	Линза $20\% d < l$	304	алмазный
	Костная фреза, конусно заостренная $l \leq 5$ мм	406	твердосплавный
	Костная фреза, конусно заостренная $5 < l \leq 7$ мм	407	твердосплавный
	Костная фреза, конусно заостренная $7 < l \leq 9$ мм	408	твердосплавный
	Костная фреза, конусно заостренная $9 < l \leq 10$ мм	409	твердосплавный
	Костная фреза, конусно заостренная $10 < l \leq 11$ мм	410	твердосплавный
	Луковицеобразный	464	алмазный
	Межзубной бор	465	алмазный
	Сферическая с концевым буртиком, длинная	494	алмазный
	Заостренная, короткая $l \leq 3d$	496	твердосплавный
	Конусная, полусфериче- ская, выпуклая сторона	507	алмазный
	Конусная, закругленная, боковое резание с напра- вителем	508	алмазный
	Бор, иглообразный, корот- кий, длинная шейка	539	алмазный
См. 539	Бор, иглообразный, стан- дартный, длинная шейка	540	алмазный
	Бор, конусный с шариком, только боковое резание	551	алмазный

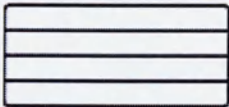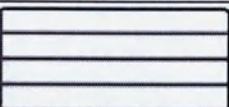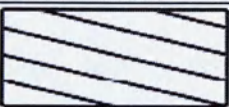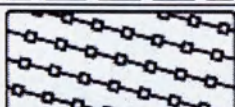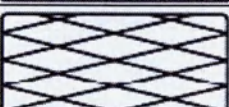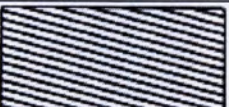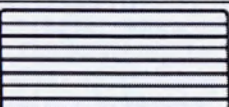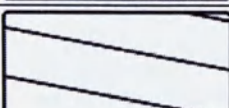1.4.2 Виды нарезки зубчиков боров стоматологических твердосплавных

Тип нарезки зубчиков	Описание	Кодовый номер
	Нарезка зубчиков бора: прямая	001
	Нарезка зубчиков бора: прямая, левая поперечная нарезка	002
	Нарезка зубчиков бора: прямая, острый режущий угол	003
	Нарезка зубчиков бора: правая спиральная	006
	Нарезка зубчиков бора: правая спиральная, левая поперечная	007
	Нарезка зубчиков бора: правая спиральная, тонкая левая поперечная	008
	Нарезка зубчиков бора: правая спиральная, двойное спиральное симметричное резание	019
	Нарезка зубчиков финишного бора: прямая очень тонкая	031
	Нарезка зубчиков финишного бора: правая спиральная, очень тонкая	032
	Нарезка зубчиков финишного бора: прямая, тонкая	041
	Нарезка зубчиков финишного бора: правая спиральная, тонкая	042
	Нарезка зубчиков финишного бора: прямая, средняя	071
	Нарезка зубчиков финишного бора: правая спиральная, средняя	072
	Нарезка зубчиков для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя	295

	Нарезка зубчиков для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	297
---	---	-----

1.4.3 Твердость хвостовика

Твердость хвостовика у боров стоматологических составляет не менее 30-34 HRC.

Твердость хвостовика в зоне соединения с твердым сплавом составляет не менее 41,5-53 HRC.

1.4.4 Параметры шероховатости поверхности

Шероховатость поверхности рабочей части и шейки – $Ra \leq 1,25$ мкм.

Шероховатость цилиндрической поверхности хвостовика - $Ra \leq 0,63$ мкм.

Шероховатость остальных поверхностей хвостовика - $Ra \leq 2,5$ мкм.

Шероховатость торца хвостовика – $Rz \leq 49$ мкм.

1.4.5 Радиальное биение

Радиальное биение рабочей части боров стоматологических относительно цилиндрической поверхности хвостовика не превышает 0,05 мм.

1.4.6 Прочность шейки

Боры стоматологические имеют прочную шейку, не ломаются и имеют остаточную деформацию менее 0,05 мм.

1.5 Спецификация боров стоматологических алмазных:

Спецификация боров указана в ПРИЛОЖЕНИИ 1 к Инструкции по применению.

1.6 Спецификация боров стоматологических твердосплавных:

Спецификация боров указана в ПРИЛОЖЕНИИ 2 к Инструкции по применению.

2. Упаковка и маркировка продукции

2.1 Упаковка/Комплектность поставки.

Боры стоматологические упаковываются по 10 шт. в мягкий блистер из поливинилхлорида или в жесткие полипропиленовые коробочки по 5 шт. или по 6 шт. (боры с хвостовиками для углового экстрадлинного наконечника (код 206) и для прямого стандартного наконечника (код 104)). Затем блистеры по 5 шт. упаковываются во вторичную упаковку из поливинилхлорида вместе с руководством по эксплуатации. Жесткие пропиленовые коробочки по 10 шт. или по 6 шт. (боры с хвостовиками для углового экстрадлинного наконечника (код 206) и для прямого стандартного наконечника (код 104)) упаковываются в картонные коробки вместе с руководством по эксплуатации.

Материалы первичных упаковок:

Упаковка	Наименование материала	Производитель
Мягкий блистер	Поливинилхлорид	PANTA PLAST SP. Z O.O. uL. SZPARAGOWA 12 91-211 LODZ Польша
Жесткая коробочка	Полипропилен	ABIPLAST ELIGIUSZ GRZELAK Piątkowisko 2 95-200 Pabianice Польша

Материалы вторичных упаковок:

Упаковка	Наименование материала	Производитель
Блистер	Поливинилхлорид	PANTA PLAST SP. Z O.O. uL. SZPARAGOWA 12 91-211 LODZ Польша
Картонная коробка	Картон (бумага)	Spółka Handlowo-Usługowa z o.o."PAPIER" Wodna 14 90-024 Łódź Польша

2.2 Маркировка

Медицинские изделия, попадающие под действие Директивы о медицинских изделиях 93/42/ЕЭС, должны иметь надлежащую маркировку в соответствии со стандартами EN 1041:2008 и EN 980:2008.

Нанесенный на этикетку № ISO содержит в себе следующую информацию:

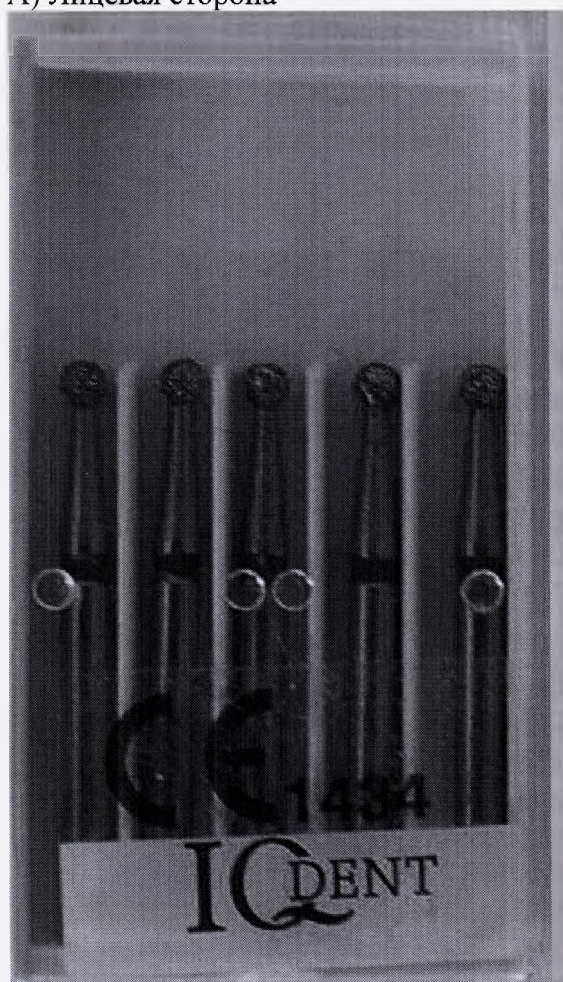
- материал рабочей части.
- тип хвостовика

- общая длина
- форма рабочей части
- вид нарезки для твердосплавных боров/ размер зерна для алмазных боров
- диаметр рабочей части.

Подробную расшифровку значений символов № ISO можно найти в каталоге на официальном сайте производителя: www.iqdent.pl.

Символы на этикетке (первичная упаковка):


А) Лицевая сторона



CE
1434

Знак и идентификационный номер уполномоченного органа.
Продукт отвечает необходимым требованиям Директивы
93/42/ ЕЭС для медицинских изделий.

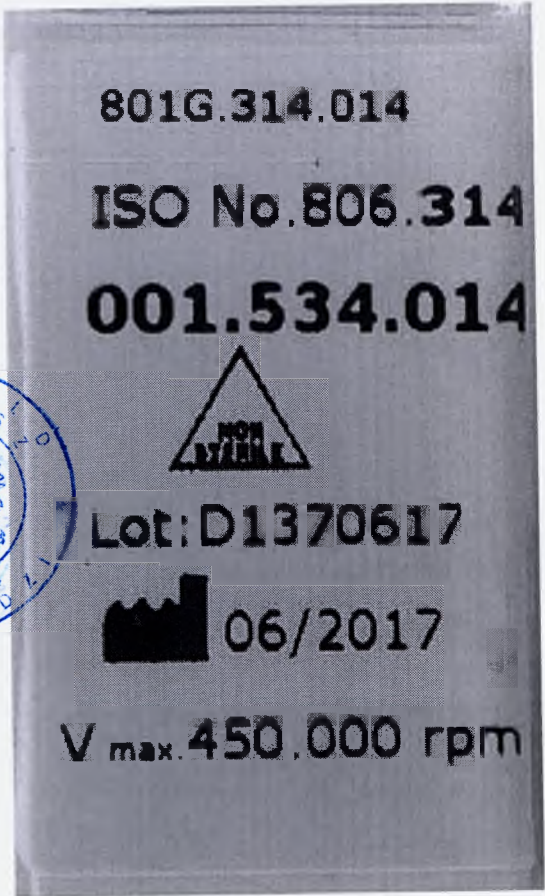Б) Обратная сторона.



801G.314.014
ISO No.806.314
001.534.014

Реф-номер

ИСО номер



Не стерильно



Код партии



Дата изготовления

V max. 450.000 rpm

Максимальная скорость вращения

Макет маркировки этикетки для поставок в РФ.

Реф- номер
ИСО номер




ООО «Имплант Гуру», Россия, 105062, г. Москва, улица Покровка, дом 43, строение 2. E-mail: info@implantshop.ru www.tdental.ru
Номер и дата РУ

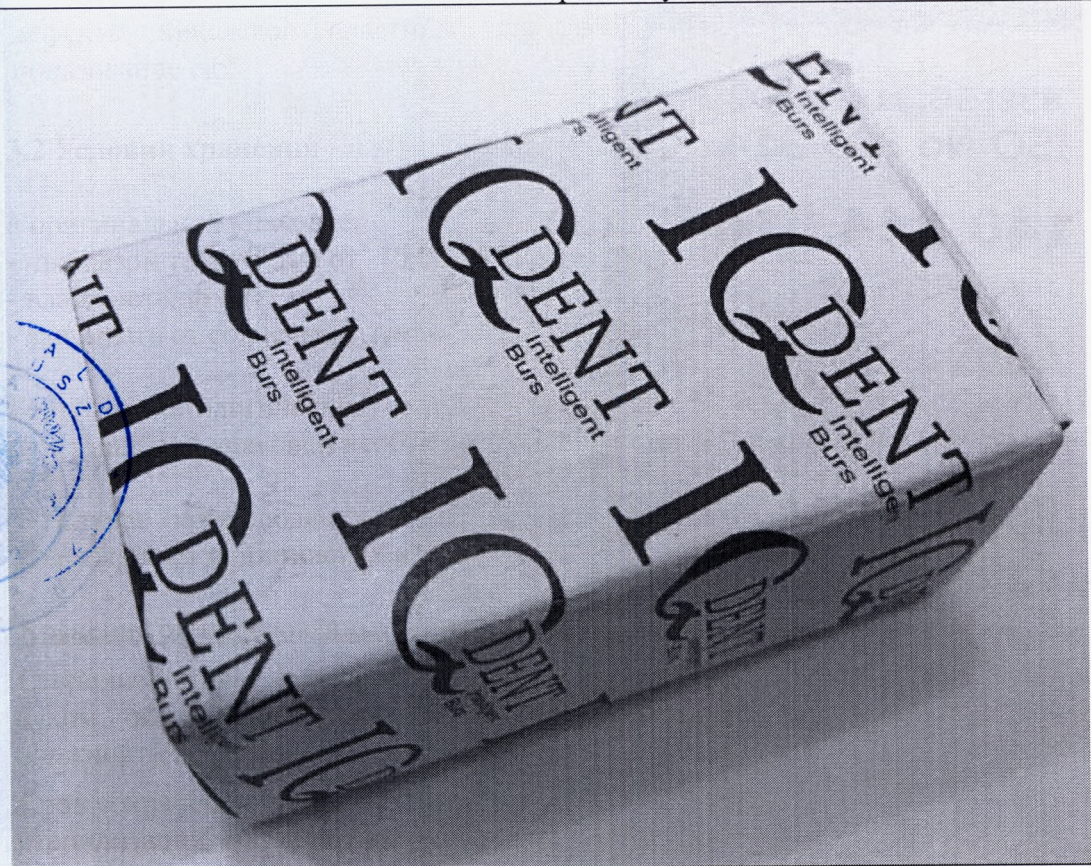
ООО «Имплант Гуру», Россия, 105062, г. Москва, улица Покровка, дом 43, строение 2.
E-mail: info@implantshop.ru
www.tdental.ru

Номер и дата РУ


Уполномоченной
представитель на
территории РФ на
принятие претензий
от покупателей.
Сведения о
государственной
регистрации
медицинского
изделия.

Вторичная упаковка

Вторичная упаковка



Вторичная упаковка (этикетка)

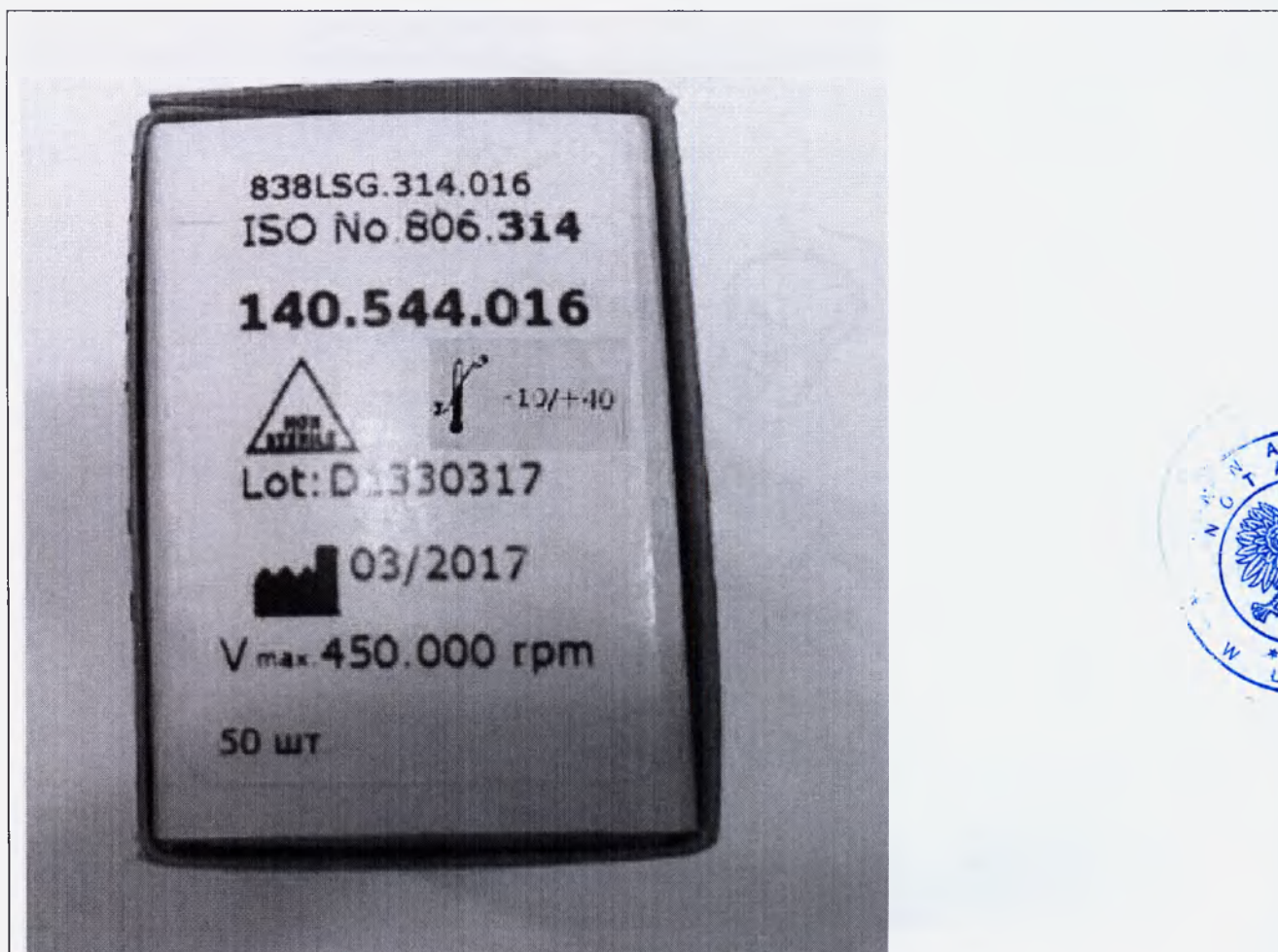

3. Правила хранения, утилизации и транспортирования

3.1 Срок годности

Срок годности для повторного использования органичивается только степенью

изношенности или поломки, а также определенным количеством циклов стерилизации. Срок годности сокращается в следующих случаях: истирание алмазного напыления, дефекты никелевой пластины или любые повреждения продукции, затрудняющие пользование ею.

3.2 Условия хранения

- в оригинальной упаковке:
- диапазон температур от -10 до +40 градусов по Цельсию
 - влажность до 80%
 - защищать от солнечных лучей

Боры стоматологические должны храниться в темном сухом месте. После снятия оригинальной упаковки необходимо избегать контаминации и механических повреждений.

В случае несоблюдения указанных рекомендаций существует риск для пациентов и повреждения медицинских изделий.

Хранение стерилизованных потребителем изделий.

Стерилизованные потребителем изделия храните в стерилизационных пакетах в чистом, сухом, обеспыленном помещении при температуре от +15 до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, избегая воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

Срок сохранения стерильности зависит от типа используемой упаковки для финишной стерилизации, согласно рекомендациям изготовителя упаковки.

3.3 Утилизация

Нельзя использовать боры с искривленными наконечниками (возможны вибрации), с признаками коррозии или недостаточно острые. В России использованные боры должны быть утилизированы как отходы класса Б, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10.

3.4 Транспортирование

Боры стоматологические следует перевозить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения.

3.5 Требования охраны окружающей среды

Боры стоматологические при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

3.6. Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие боров стоматологических твердосплавных требованиям при соблюдении условий использования, хранения и транспортирования. Производитель не несет ответственности за возможные последствия, вызванные неправильным использованием медицинского изделия.

- Гарантированный срок службы изделия - 10 применений (стерилизаций)

- гарантированный срок хранения 5 лет с даты изготовления

Производитель:

IQDENT Sp. z o. o. (ООО Айкьюдент), Польша

Адрес: ul. Ks. Hugona Kollataja 8 lok. 4, 91-427 Lodz, Poland

Tel: +48 733 102 021

E-mail: sales@iqdent.pl

На территории Российской Федерации претензии и обращения потребителей принимаются по адресу: Россия, 105062, г. Москва, улица Покровка, дом 43, строение 2, Общество с ограниченной ответственностью «Имплант Гуру» (уполномоченный представитель производителя). Тел./факс: (495) 627-637-0. E-mail: info@implantshop.ru, www.tdental.ru.



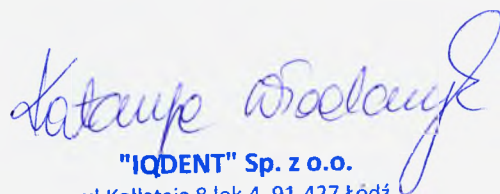
Katarzyna Włodarczyk
Katarzyna Włodarczyk
(Катажина Влодарчик)

ПРИЛОЖЕНИЯ

к Инструкции по применению

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Боры стоматологические IQDENT



"IQDENT" Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 8 lok. 4, 91-427 Łódź

NIP: 725-210-37-66, Regon: 362935470

tel. +48 733 10 20 21



ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Спецификация боров стоматологических алмазных

Код по ИСО 6360	Тип хвостовика	Форма рабочей части	Цветовая кодировка алмазного покрытия	Диаметр рабочей части (+/- 0,1)	Длина рабочей части (+/- 0,1)	Длина хвостовика (+/- 0,1)	Масса (+/- 0,1)
806.313.001.514.014	313-На турбинный наконечник (короткий)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	014-1,4 мм	1,4 мм	16,5 мм	0,25 гр
806.313.001.524.014	313-На турбинный наконечник (короткий)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	16,5 мм	0,25 гр
806.313.001.534.014	313-На турбинный наконечник (короткий)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	16,5 мм	0,25 гр
806.313.001.544.014	313-На турбинный наконечник (короткий)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	16,5 мм	0,25 гр
806.313.010.514.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	010-Обратноконусная	514-красное	010-1,0 мм	1,4 мм	16,5 мм	0,25 гр
806.313.010.524.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,4 мм	16,5 мм	0,25 гр
806.313.010.534.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	010-Обратноконусная	534-зеленое	010-1,0 мм	1,4 мм	16,5 мм	0,25 гр
806.314.010.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,5 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.012.534.012	313-На турбинный наконечник (короткий)	012- Обратноконусная (15°<α≤ 30°)	534-зеленое	012-1,2 мм	1,5 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.012.544.012	313-На турбинный наконечник (короткий)	012- Обратноконусная (15°<α≤ 30°)	544-черное	012-1,2 мм	1,5 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.019.524.014	313-На турбинный наконечник (короткий)	019- Обратноконусная с буртиком	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	3,0 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.019.544.014	313-На турбинный наконечник (короткий)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	014-1,4 мм	3,0 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.108.514.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l≤3,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	l≤3,5 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.108.524.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (l≤3,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	l≤3,5 мм	16,5 мм	0,3 гр

806.313.108.534.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	$l \leq 3,5$ мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.108.534.012	313-На турбинный наконечник (короткий)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.108.544.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	010-1,0 мм	$l \leq 3,5$ мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.243.514.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	243-Пламя, стандартная	514-красное	010-1,0 мм	3,0 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.243.524.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	243-Пламя, стандартная	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	3,0 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.243.534.012	313-На турбинный наконечник (короткий)	243-Пламя, стандартная	534-зеленое	012-1,2 мм	3,0 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.313.243.544.010	313-На турбинный наконечник (короткий)	243-Пламя, стандартная	544-черное	010-1,0 мм	3,0 мм	16,5 мм	0,3 гр
806.314.001.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.504.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	007-0,7 мм	0,7 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	008-0,8 мм	0,8 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.001.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.514.035	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	035-3,5 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	007-0,7 мм	0,7 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	008-0,8 мм	0,8 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.524.035	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	035-3,5 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.001.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.534.035	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	035-3,5 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.001.544.035	314-На турбинный наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	035-3,5 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр

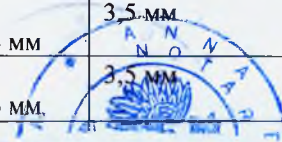

806.314.002.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	534-зеленое	012-1,2 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная 3,5 мм	534-зеленое	014-1,4 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	534-зеленое	016-1,6 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	534-зеленое	018-1,8 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	544-черное	012-1,2 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	544-черное	014-1,4 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	544-черное	016-1,6 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.002.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	544-черное	018-1,8 мм	3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	514-красное	010-1,0 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	514-красное	012-1,2 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	514-красное	014-1,4 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	514-красное	016-1,6 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	514-красное	018-1,8 мм	2,3 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.012.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	2,3 мм	19 мм	0,3 гр


806.314.012.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	534-зеленое	010-1,0 мм	1,5 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	534-зеленое	012-1,2 мм	1,5 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,5 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	534-зеленое	016-1,6 мм	1,5 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	534-зеленое	018-1,8 мм	2,3 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.534.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	534-зеленое	021-2,1 мм	2,3 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	544-черное	012-1,2 мм	1,5 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	544-черное	014-1,4 мм	1,5 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	544-черное	016-1,6 мм	1,5 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	544-черное	018-1,8 мм	2,3 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.012.544.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	012- Обратноконусная ($15^\circ < \alpha \leq 30^\circ$)	544-черное	021-2,1 мм	2,3 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	514-красное	012-1,2 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	514-красное	016-1,6 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	534-зеленое	012-1,2 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	534-зеленое	014-1,4 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	534-зеленое	016-1,6 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	534-зеленое	018-1,8 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр

806.314.019.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	012-1,2 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	014-1,4 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	016-1,6 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.019.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	018-1,8 мм	3,0 mm	19 мм	0,3 гр
806.314.108.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	504-желтое	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	504-желтое	014-1,4 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	504-желтое	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.514.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	514-красное	008-0,8 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	514-красное	010-1,0 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	514-красное	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	514-красное	014-1,4 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	514-красное	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.524.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	008-0,8 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр

806.314.108.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.534.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	008-0,8 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	010-1,0 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	014-1,4 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.108.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	504-желтое	010-1,0 мм	$l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр

806.314.110.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<1≤ 7,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	5,5<1≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.110.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.110.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤ 9,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤ 9,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤ 9,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр

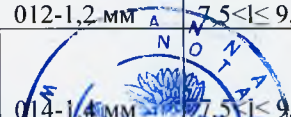

806.314.111.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<L≤ 9,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	7,5<L≤ 9,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.111.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.111.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.112.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	112-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.112.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	112-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.112.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	112-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.112.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	112-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.112.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	112-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.112.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	112-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.112.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	112-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.113.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	113-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (11,5<l≤13,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	11,5<l≤13,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.113.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	113-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (11,5<l≤13,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	11,5<l≤13,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.113.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	113-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (11,5<l≤13,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	11,5<l≤13,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.113.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	113-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (11,5<l≤13,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	11,5<l≤13,5 мм	19 мм	0,3 гр



806.314.131.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.131.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	131-Цилиндрическая, острый конец (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.138.514.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	138-Цилиндрическая, полусферический конец (l≤3,5 мм)	514-красное	007-0,7 мм	l≤3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.138.524.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	138-Цилиндрическая, полусферический конец (l≤3,5 мм)	524-синее/ без кольца	007-0,7 мм	l≤3,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр



806.314.140.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.140.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.140.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	140-Цилиндрическая, полусферический конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.141.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<l<9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<l<9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	7,5<l<9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	7,5<l<9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<l<9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<l<9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.141.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	141-Цилиндрическая, полусферический конец (7,5<l<9,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	7,5<l<9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	9,5<l<11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	9,5<l<11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	9,5<l<11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	9,5<l<11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	9,5<l<11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l<11,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	9,5<l<11,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.142.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.142.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.160.504.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	160- Конусная, заостренная (угол≤10°)	504-желтое	008-0,8 мм	4,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.160.514.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	160- Конусная, заостренная (угол≤10°)	514-красное	008-0,8 мм	4,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.160.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	160- Конусная, заостренная (угол≤10°)	514-красное	010-1,0 мм	4,0 мм	19 мм	0,3 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	160- Конусная, заостренная (угол≤10°)	524-синее/ без кольца	008-0,8 мм	4,0 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.160.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	160- Конусная, заостренная (угол $\leq 10^\circ$)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм *	4,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.160.534.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	160- Конусная, заостренная (угол $\leq 10^\circ$)	534-зеленое	008-0,8 мм	4,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.160.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	160- Конусная, заостренная (угол $\leq 10^\circ$)	534-зеленое	010-1,0 мм	4,0 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<I $\leq$ 6,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	3,5<I $\leq$ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.164.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<l≤ 6,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	3,5<l≤ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<l≤ 6,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	3,5<l≤ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<l≤ 6,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	3,5<l≤ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<l≤ 6,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	3,5<l≤ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<l≤ 6,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	3,5<l≤ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.164.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	164-Конусная, заостренная тонкая (3,5<l≤ 6,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	3,5<l≤ 6,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤ 8,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	6,5<l≤ 8,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.165.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	6,5<l≤8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	6,5<l≤8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	6,5<l≤8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	6,5<l≤8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	6,5<l≤8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.165.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	6,5<l≤8,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	504-желтое	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр

806.314.166.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.524.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.534.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	021-2,1 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.166.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.171.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	171-Конусная (усеченная конусная) (5,5<l≤7,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.171.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	171-Конусная (усеченная конусная) (5,5<l≤7,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.171.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	171-Конусная (усеченная конусная) (5,5<l≤7,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.171.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	171-Конусная (усеченная конусная) (5,5<l≤7,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.171.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	171-Конусная (усеченная конусная) (5,5<l≤7,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	171-Конусная (усеченная конусная) (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм		0,3 гр


[illegible]

[illegible]


806.314.173.524.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.534.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	021-2,1 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.534.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	023-2,3 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.544.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	021-2,1 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.173.544.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	173-Конусная (усеченная конусная) (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	023-2,3 мм	9,5<L≤11,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.174.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	174-Конусная (усеченная конусная) (11,5<L≤13,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	11,5<L≤13,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.174.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	174-Конусная (усеченная конусная) (11,5<L≤13,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	11,5<L≤13,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<L≤ 7,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	5,5<L≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный	514-красное	012-1,2 мм	5,5<L≤ 7,5 мм	19 мм	0,3 гр

		(полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)					
806.314.197.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	514-красное	014-1,4 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	514-красное	016-1,6 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	514-красное	018-1,8 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм	0,3 гр

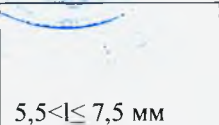


806.314.197.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l≤7,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	 5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l≤7,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.197.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	197- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (5,5<l≤7,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	5,5<l≤7,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный	504-желтое	018-1,8 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр

		(полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)					
806.314.198.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр

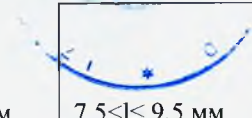
806.314.198.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	 7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.534.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	021-2,1 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.534.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный	544-черное	018-1,8 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр


		(полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)					
806.314.198.544.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	023-2,3 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,3 гр
806.314.198.544.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤11,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤11,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤11,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤11,5 мм)	504-желтое	018-1,8 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤11,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр

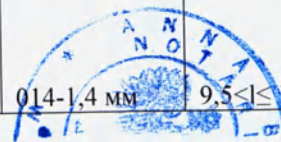

806.314.199.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр

		(полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)					
806.314.199.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.199.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	199- Конусная, куполообразный (полусферический) конец (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.220.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	220- Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.220.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	220- Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр

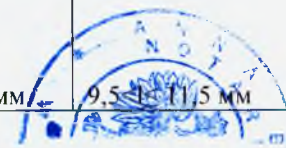

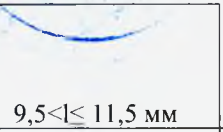806.314.220.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	220- Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	 9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.220.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	220- Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.220.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	220- Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.220.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	220- Конусная, куполообразный конец, только боковое резание (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	514-красное	012-1,2 мм	3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	514-красное	014-1,4 мм	3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	514-красное	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	514-красное	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее	012-1,2 мм	3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	012-1,2 мм	3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	014-1,4 мм	3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.225.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	014-1,4 мм	3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.225.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	514-красное	014-1,4 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	534-зеленое	014-1,4 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	534-зеленое	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	534-зеленое	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	544-черное	014-1,4 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.237.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	237-Груша (d<l≤3d)	544-черное	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.238.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	238 - Груша (3d<l)	514-красное	012-1,2 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.238.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	238 - Груша (3d<l)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.238.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	238 - Груша (3d<l)	534-зеленое	014-1,4 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	504-желтое	010-1,0 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	504-желтое	018-1,8 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.243.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	514-красное	010-1,0 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	514-красное	012-1,2 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	514-красное	014-1,4 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	514-красное	016-1,6 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	514-красное	018-1,8 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.514.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	514-красное	025-2,5 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.524.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	534-зеленое	010-1,0 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	534-зеленое	012-1,2 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	534-зеленое	014-1,4 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	534-зеленое	016-1,6 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	534-зеленое	018-1,8 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	010-1,0 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	012-1,2 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.243.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	014-1,4 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	016-1,6 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	018-1,8 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	025-2,5 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	7,5<I≤9,5 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.249.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.243.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	014-1,4 мм	3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	016-1,6 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	018-1,8 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.243.544.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	025-2,5 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<1≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр


806.314.249.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.249.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.249.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (7,5<l≤ 9,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	504-желтое	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	504-желтое	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр



806.314.250.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.250.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	250- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.251.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрелчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр

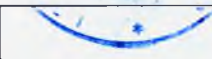806.314.251.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	 11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.251.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	504-желтое	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	514-красное	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	514-красное	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	534-зеленое	016-1,6 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	534-зеленое	014-1,4 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.254.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	254-Почка	534-зеленое	018-1,8 мм	4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.504.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	504-желтое	014-1,4 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	504-желтое	016-1,6 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	504-желтое	018-1,8 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.504.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	504-желтое	023-2,3 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.257.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	514-красное	014-1,4 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	514-красное	016-1,6 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	514-красное	018-1,8 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.514.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	514-красное	025-2,5 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.524.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.524.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	012-1,2 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	014-1,4 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	016-1,6 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	018-1,8 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.534.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	023-2,3 мм	5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	544-черное	014-1,4 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	544-черное	016-1,6 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.257.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	544-черное	018-1,8 мм	4,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	504-желтое	012-1,2 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.504.014	наконечник (стандартный)	277-Яйцо	504-желтое	014-1,4 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.277.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	504-желтое	016-1,6 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	504-желтое	018-1,8 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.504.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	504-желтое	023-2,3 мм	4,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.514.009	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	009-0,9 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	012-1,2 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	014-1,4 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	016-1,6 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	018-1,8 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.514.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	023-2,3 мм	4,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.514.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	025-2,5 мм	4,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.524.009	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	009-0,9 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.524.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	4,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	534-зеленое	012-1,2 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	534-зеленое	014-1,4 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	534-зеленое	016-1,6 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.277.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	534-зеленое	018-1,8 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.534.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	534-зеленое	023-2,3 мм	4,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	544-черное	012-1,2 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	544-черное	014-1,4 мм	2,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	544-черное	016-1,6 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	544-черное	018-1,8 мм	3,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.277.544.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	277-Яйцо	544-черное	023-2,3 мм	4,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	504-желтое	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	514-красное	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр



806.314.290.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.290.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5<l≤ 11,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	9,5<l≤ 11,5 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.291.504.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	504-желтое	012-1,2 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.504.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	504-желтое	016-1,6 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	514-красное	010-1,0 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	514-красное	012-1,2 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	514-красное	014-1,4 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	514-красное	016-1,6 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.291.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.291.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	291- Торпеда цилиндрическая (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.295.514.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	295- Торпеда конусная (l≤3,5 мм)	514-красное	007-0,7 мм	l≤3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.295.524.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	295- Торпеда конусная (l≤3,5 мм)	524-синее/ без кольца	007-0,7 мм	l≤3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.295.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	295- Торпеда конусная (l≤3,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	l≤3,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.299.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	299 - Торпеда конусная (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<l≤11,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.524.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	524-синее/ без кольца	008-0,8 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.534.008	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	534-зеленое	008-0,8 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	534-зеленое	010-1,0 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	534-зеленое	012-1,2 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.551.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	534-зеленое	014-1,4 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	534-зеленое	016-1,6 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	544-черное	010-1,0 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	544-черное	012-1,2 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	544-черное	014-1,4 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.551.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	551- Бор, конусный с шариком, только боковое резание	544-черное	016-1,6 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.464.504.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	464- Луковичеобразный	504-желтое	018-1,8 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.464.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	464- Луковичеобразный	514-красное	018-1,8 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.464.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	464- Луковичеобразный	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.465.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	465-Межзубной бор	514-красное	018-1,8 мм	5,9 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.465.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	465-Межзубной бор	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	5,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.465.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	465-Межзубной бор	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	5,9 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.465.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	465-Межзубной бор	534-зеленое	018-1,8 мм	5,9 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	514-красное	018-1,8 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.494.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.524.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	534-зеленое	012-1,2 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	534-зеленое	014-1,4 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	534-зеленое	016-1,6 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	534-зеленое	018-1,8 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.534.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	534-зеленое	023-2,3 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	544-черное	010-1,0 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	544-черное	012-1,2 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	544-черное	014-1,4 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	544-черное	016-1,6 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	544-черное	018-1,8 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.494.544.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	494- Сферическая с концевым буртиком, длинная	544-черное	023-2,3 мм	10,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.507.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	507- Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	514-красное	018-1,8 мм	5,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.507.514.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	507- Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	514-красное	023-2,3 мм	5,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.507.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	507- Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	5,8 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.507.524.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	507- Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	5,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.507.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	507- Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	534-зеленое	018-1,8 мм	5,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.507.534.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	507- Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	534-зеленое	023-2,3 мм	5,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.507.544.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	507- Конусная, полусферическая, выпуклая сторона	544-черное	023-2,3 мм	5,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	514-красное	016-1,6 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.514.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	514-красное	021-2,1 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.524.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	534-зеленое	016-1,6 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.534.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	534-зеленое	021-2,1 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	544-черное	016-1,6 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.508.544.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	508- Конусная, закругленная, боковое резание с направителем	544-черное	021-2,1 мм	8,0 мм	19 мм	0,25 гр
	314-На турбинный наконечник (стандартный)	539- Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	514-красное	010-1,0 мм	3,0 мм	19 мм	0,25 гр



806.314.539.524.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	539- Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	524-синее/ без кольца	007-0,7 мм	3,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.539.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	539- Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	3,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.539.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	539- Бор, иглообразный, короткий, длинная шейка	534-зеленое	010-1,0 мм	3,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.540.504.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	540- Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	504-желтое	010-1,0 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.540.514.009	314-На турбинный наконечник (стандартный)	540- Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	514-красное	009-0,9 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.540.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	540- Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	514-красное	010-1,0 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.540.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	540- Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.540.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	540- Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	534-зеленое	010-1,0 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.540.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	540- Бор, иглообразный, стандартный, длинная шейка	544-черное	010-1,0 мм	4,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	007-0,7 мм	0,7 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.514.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	514-красное	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.007	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	007-0,7 мм	0,7 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.004.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.524.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.534.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	534-зеленое	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.544.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	010-1,0 мм	1,0 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.544.012	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.544.014	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	19 мм	0,25 гр

806.314.004.544.016	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.544.018	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.544.021	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	021-2,1 мм	2,1 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.544.023	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	19 мм	0,25 гр
806.314.004.544.025	314-На турбинный наконечник (стандартный)	004-Сферическая длинная шейка	544-черное	025-2,5 мм	2,5 мм	19 мм	0,25 гр
806.316.001.514.010	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	010-1,0 мм	1,0 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.514.012	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	012-1,2 мм	1,2 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.514.014	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	014-1,4 мм	1,4 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.514.016	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	016-1,6 мм	1,6 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.514.018	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	018-1,8 мм	1,8 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.524.010	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,0 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.524.012	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.524.014	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.524.016	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	25 мм	0,4 гр

806.316.001.524.018	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.524.021	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.524.023	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.534.010	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	010-1,0 мм	1,0 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.534.012	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.534.014	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.534.016	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.534.018	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.534.021	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.534.023	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.544.010	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	010-1,0 мм	1,0 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.544.012	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.544.014	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	25 мм	0,4 гр

806.316.001.544.016	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.544.018	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.544.021	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	021-2,1 мм	2,1 мм	25 мм	0,4 гр
806.316.001.544.023	316-На турбинный наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	25 мм	0,4 гр
806.204.001.514.023	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	023-2,3 мм	2,3 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.012	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.014	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.016	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.018	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.021	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.023	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.025	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	2,5 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.029	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	029-2,9 мм	2,9 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.524.035	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	035-3,5 мм	3,5 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.012	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.014	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.016	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	22 мм	0,55 гр

806.204.001.534.018	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.021	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.023	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.025	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	025-2,5 мм	2,5 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.029	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	029-2,9 мм	2,9 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.001.534.035	204-На угловой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	035-3,5 мм	3,5 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.108.524.012	204-На угловой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.111.524.014	204-На угловой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($7,5 < l \leq 9,5$ мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.165.524.014	204-На угловой наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая ($6,5 < l \leq 8,5$ мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.166.524.010	204-На угловой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая ($8,5 < l \leq 10,5$ мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,0 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.166.524.014	204-На угловой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая ($8,5 < l \leq 10,5$ мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.225.524.018	204-На угловой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная ($d < l \leq 3d$)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.277.514.018	204-На угловой наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	018-1,8 мм	1,8 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.277.514.023	204-На угловой наконечник (стандартный)	277-Яйцо	514-красное	023-2,3 мм	2,3 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.277.524.018	204-На угловой наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	22 мм	0,55 гр
806.204.277.524.023	204-На угловой наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	22 мм	0,55 гр
806.205.001.524.014	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.524.016	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	26 мм	0,6 гр

806.205.001.524.018	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.524.021	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.524.023	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.524.025	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	2,5 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.534.014	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.534.016	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.534.018	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.534.021	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.534.023	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	26 мм	0,6 гр
806.205.001.534.025	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	025-2,5 мм	2,5 мм	26 мм	0,6 гр
806.206.001.504.014	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	014-1,4 мм	1,4 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.514.014	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	014-1,4 мм	1,4 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.524.014	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.534.014	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.544.014	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.504.018	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	018-1,8 мм	1,8 мм	26 мм	0,65 гр


806.206.001.514.018	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	018-1,8 мм	1,8 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.524.018	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.534.018	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.544.018	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.504.023	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	023-2,3 мм	2,3 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.514.023	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	023-2,3 мм	2,3 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.524.023	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.534.023	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.544.023	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.504.027	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	027-2,7 мм	2,7 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.514.027	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	027-2,7 мм	2,7 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.524.027	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	027-2,7 мм	2,7 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.534.027	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	027-2,7 мм	2,7 мм	26 мм	0,65 гр

806.206.001.544.027	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	027-2,7 мм	2,7 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.504.031	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	031-3,1 мм	3,1 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.514.031	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	031-3,1 мм	3,1 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.524.031	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	031-3,1 мм	3,1 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.534.031	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	031-3,1 мм	3,1 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.544.031	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	031-3,1 мм	3,1 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.504.035	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	504-желтое	035-3,5 мм	3,5 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.514.035	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	514-красное	035-3,5 мм	3,5 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.524.035	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	035-3,5 мм	3,5 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.534.035	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	035-3,5 мм	3,5 мм	26 мм	0,65 гр
806.206.001.544.035	206-На угловой наконечник (экстрадлинный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	035-3,5 мм	3,5 мм	26 мм	0,65 гр
806.104.001.524.009	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	009-0,9 мм	0,9 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,0 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.001.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	2,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	027-2,7 мм	2,7 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.029	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	029-2,9 мм	2,9 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	033-3,3 мм	3,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	035-3,5 мм	3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.042	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	042-4,2 мм	4,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.524.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	524-синее/ без кольца	050-5,00 мм	5,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	025-2,5 мм	2,5 мм	44,5 мм	1,3 гр


806.104.001.534.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	027-2,7 мм	2,7 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.029	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	029-2,9 мм	2,9 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	033-3,3 мм	3,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	035-3,5 мм	3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.042	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	042-4,2 мм	4,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.534.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	534-зеленое	050-5,00 мм	5,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	025-2,5 мм	2,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	027-2,7 мм	2,7 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.029	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	029-2,9 мм	2,9 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	033-3,3 мм	3,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	035-3,5 мм	3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.042	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	042-4,2 мм	4,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.001.544.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	001-Сферическая (круглая)	544-черное	050-5,00 мм	5,00 мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.002.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.002.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.002.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	534-зеленое	016-1,6 мм	3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.002.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	002- Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная	534-зеленое	018-1,8 мм	3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.009	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	009-0,9 мм	0,9 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,0 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	2,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	040-4,00 мм	4,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.524.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	524-синее/ без кольца	050-5,00 мм	5,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр

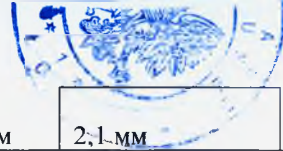


806.104.010.534.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	025-2,5 мм	2,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	040-4,00 мм	4,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.534.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	534-зеленое	050-5,00 мм	5,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	025-2,5 мм	2,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	040-4,00 мм	4,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.010.544.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	010-Обратноконусная	544-черное	050-5,00 мм	5,00 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.524.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.019.534.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.019.544.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	019- Обратноконусная с буртиком	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.524.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	524-синее/ без кольца	035-3,5 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.534.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	035-3,5 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	012-1,2 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	016-1,6 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр

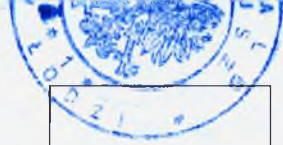


806.104.108.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	018-1,8 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.108.544.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	108-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($l \leq 3,5$ мм)	544-черное	035-3,5 мм	$l \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.524.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	027-2,7 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.524.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	050-5,00 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.524.055	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	055 - 5,5 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.524.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	524-синее/ без кольца	060 - 6,00 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.534.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое ($5,5 < l \leq 7,5$ мм)	534-зеленое	027-2,7 мм	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.110.534.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	050-5,00 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.534.055	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	055 - 5,5 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.534.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	534-зеленое	060 - 6,00 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.544.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	027-2,7 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.544.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	050-5,00 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.544.055	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	055 - 5,5 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.110.544.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (5,5<l≤ 7,5 мм)	544-черное	060 - 6,00 мм	5,5<l≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<l≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

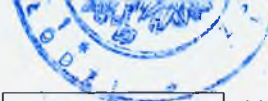

806.104.111.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	027-2,7 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	040-4,00 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	050-5,00 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.055	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	055 - 5,5 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.524.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	060 - 6,00 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	534-зеленое	027-2,7 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	534-зеленое	040-4,00 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<1≤ 9,5 мм)	534-зеленое	050-5,00 мм	7,5<1≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.111.534.055	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	055 - 5,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.534.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	060 - 6,00 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	027-2,7 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	040-4,00 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	050-5,00 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.055	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	055 - 5,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.111.544.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	111-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	060 - 6,00 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.130.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	130-Цилиндрическая, острый конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.130.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	130-Цилиндрическая, острый конец (7,5<l≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.130.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	130-Цилиндрическая, острый конец (7,5<l≤9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

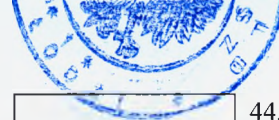


806.104.130.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	130-Цилиндрическая, острый конец (7,5<L≤9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<L≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.130.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	130-Цилиндрическая, острый конец (7,5<L≤9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<L≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.130.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	130-Цилиндрическая, острый конец (7,5<L≤9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<L≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.142.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<L≤11,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	9,5<L≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.142.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	142-Цилиндрическая, полусферический конец (9,5<l≤11,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	9,5<l≤11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.165.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	6,5<l≤8,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.165.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	6,5<l≤8,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.165.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	6,5<l≤8,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.165.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	6,5<l≤8,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.165.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	6,5<l≤8,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.165.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	165-Конусная, заостренная тонкая (6,5<l≤8,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	6,5<l≤8,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.166.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.166.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	8,5<l≤10,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.166.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.166.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	8,5<l≤10,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.166.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	8,5<l≤10,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.166.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	166-Конусная, заостренная тонкая (8,5<l≤10,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	8,5<l≤10,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.524.009	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) (1 ≤ 3,5 мм)	524-синее/ без кольца	009-0,9 мм	1 ≤ 3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.524.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) (1 ≤ 3,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1 ≤ 3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) (1 ≤ 3,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1 ≤ 3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) (1 ≤ 3,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1 ≤ 3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) (1 ≤ 3,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1 ≤ 3,5 мм	44,5 мм	1,3 гр




806.104.169.534.009	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	009-0,9 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.534.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.544.009	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	544-черное	009-0,9 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.544.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	544-черное	010-1,0 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	544-черное	012-1,2 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	544-черное	016-1,6 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.169.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	169- Конусная (усеченная конусная) ($1 \leq 3,5$ мм)	544-черное	018-1,8 мм	$1 \leq 3,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.524.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	524-синее/ без кольца	033-3,3 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.524.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	524-синее/ без кольца	040-4,00 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.524.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	524-синее/ без кольца	050-5,00 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) ($7,5 < 1 \leq 9,5$ мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	$7,5 < 1 \leq 9,5$ мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.172.534.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	534-зеленое	033-3,3 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.534.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	534-зеленое	040-4,00 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.534.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	534-зеленое	050-5,00 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.544.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	544-черное	033-3,3 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.544.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	544-черное	040-4,00 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.172.544.050	104 - прямой наконечник (стандартный)	172-Конусная (усеченная конусная) (7,5<1<9,5 мм)	544-черное	050-5,00 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<1<9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.524.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<1<9,5 мм)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<1<9,5 мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.524.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<1<9,5 мм)	524-синее/ без кольца	027-2,7 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<1<9,5 мм)	524-синее/ без кольца	033-3,3 мм	7,5<1<9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

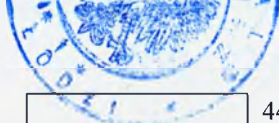


806.104.198.524.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	035-3,5 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.524.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	040-4,00 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.534.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	023-2,3 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.534.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	027-2,7 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.534.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	033-3,3 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.534.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	035-3,5 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.534.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	040-4,00 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный	544-черное	016-1,6 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

		(полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)					
806.104.198.544.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	023-2,3 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.544.027	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	027-2,7 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.544.033	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	033-3,3 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.544.035	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	035-3,5 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.198.544.040	104 - прямой наконечник (стандартный)	198 Конусная, куполообразный (полусферический) конец (7,5<l≤9,5 мм)	544-черное	040-4,00 мм	7,5<l≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.524.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.524.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
	104 - прямой наконечник	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр

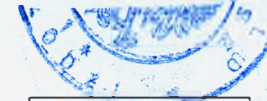

806.104.225.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.534.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.534.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	018-1,8 мм	1,8 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.544.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	021-2,1 мм	2,1 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.225.544.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	225-Обратноконусная (d<l≤3d)	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.232.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.232.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.232.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.314.232.524.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	1,0 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.314.232.534.010	314-На турбинный наконечник (стандартный)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	534-зеленое	010-1,0 мм	1,0 мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.243.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.243.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	243-Пламя, стандартная	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.524.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	010-1,0 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.524.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.534.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	534-зеленое	010-1,0 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	534-зеленое	012-1,2 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤9,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	7,5<I≤9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

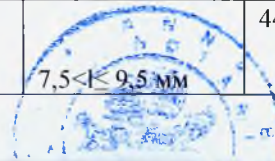



806.104.249.534.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤ 9,5 мм)	534-зеленое	021-2,1 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.544.010	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤ 9,5 мм)	544-черное	010-1,0 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤ 9,5 мм)	544-черное	012-1,2 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤ 9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤ 9,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤ 9,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.249.544.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (7,5<I≤ 9,5 мм)	544-черное	021-2,1 мм	7,5<I≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.524.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	524-синее/ без кольца	060 - 6,00 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	534-зеленое	014-1,4 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.534.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<I≤ 13,5 мм)	534-зеленое	060 - 6,00 мм	11,5<I≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр

806.104.251.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.251.544.060	104 - прямой наконечник (стандартный)	251- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная (11,5<l≤ 13,5 мм)	544-черное	060 - 6,00 мм	11,5<l≤ 13,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.254.524.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	254-Почка	524-синее/ без кольца	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.254.534.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	254-Почка	534-зеленое	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.254.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	254-Почка	544-черное	014-1,4 мм	1,4 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.524.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.524.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.534.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.534.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.544.012	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	544-черное	012-1,2 мм	1,2 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.257.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	257- Почка, тонкая	544-черное	016-1,6 мм	1,6 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.277.524.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	277-Яйцо	524-синее/ без кольца	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.277.534.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	277-Яйцо	534-зеленое	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.277.544.023	104 - прямой наконечник (стандартный)	277-Яйцо	544-черное	023-2,3 мм	2,3 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.288.524.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	288-Торпеда цилиндрическая (5,5 < l < 7,5 мм)	524-синее/ без кольца	016-1,6 мм	5,5 < l < 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр



806.104.288.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	288-Торпеда цилиндрическая (5,5 < l ≤ 7,5 мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	5,5 < l ≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.288.534.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	288-Торпеда цилиндрическая (5,5 < l ≤ 7,5 мм)	534-зеленое	016-1,6 мм	5,5 < l ≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.288.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	288-Торпеда цилиндрическая (5,5 < l ≤ 7,5 мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	5,5 < l ≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.288.544.016	104 - прямой наконечник (стандартный)	288-Торпеда цилиндрическая (5,5 < l ≤ 7,5 мм)	544-черное	016-1,6 мм	5,5 < l ≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.288.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	288-Торпеда цилиндрическая (5,5 < l ≤ 7,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	5,5 < l ≤ 7,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.289.524.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	289-Торпеда цилиндрическая (7,5 < l ≤ 9,5 мм)	524-синее/ без кольца	018-1,8 мм	7,5 < l ≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.289.534.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	289-Торпеда цилиндрическая (7,5 < l ≤ 9,5 мм)	534-зеленое	018-1,8 мм	7,5 < l ≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.289.544.014	104 - прямой наконечник (стандартный)	289-Торпеда цилиндрическая (7,5 < l ≤ 9,5 мм)	544-черное	014-1,4 мм	7,5 < l ≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.289.544.018	104 - прямой наконечник (стандартный)	289-Торпеда цилиндрическая (7,5 < l ≤ 9,5 мм)	544-черное	018-1,8 мм	7,5 < l ≤ 9,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.290.524.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5 < l ≤ 11,5 мм)	524-синее/ без кольца	025-2,5 мм	9,5 < l ≤ 11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.290.534.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5 < l ≤ 11,5 мм)	534-зеленое	025-2,5 мм	9,5 < l ≤ 11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.290.544.025	104 - прямой наконечник (стандартный)	290- Торпеда цилиндрическая (9,5 < l ≤ 11,5 мм)	544-черное	025-2,5 мм	9,5 < l ≤ 11,5 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.304.524.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	304-Линза (20% d < l)	524-синее/ без кольца	021-2,1 мм	1,0 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.304.534.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	304-Линза (20% d < l)	534-зеленое	021-2,1 мм	1,0 мм	44,5 мм	1,3 гр
806.104.304.544.021	104 - прямой наконечник (стандартный)	304-Линза (20% d < l)	544-черное	021-2,1 мм	1,0 мм	44,5 мм	1,3 гр



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Спецификация боров стоматологических твердосплавных

Код по ИСО 6360	Тип хвостовика	Форма рабочей части	Нарезка зубчиков бора	Диаметр рабочей части (+/- 0,1)	Цветовое обозначение	Масса (+/- 0,1)	Длина рабочей части (+/- 0,1)	Длина хвостовика (+/- 0,1)
500.204.001.001.005	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	005 - 0,5 мм	без кольца	0,7 г	0,5 мм	22 мм
500.204.001.001.007	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	007 - 0,7 мм	без кольца	0,7 г	0,7 мм	22 мм
500.204.001.001.010	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	010 - 1,0 мм	без кольца	0,7 г	1,0 мм	22 мм
500.204.001.001.012	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	012 - 1,2 мм	без кольца	0,7 г	1,2 мм	22 мм
500.204.001.001.014	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	014 - 1,4 мм	без кольца	0,7 г	1,4 мм	22 мм
500.204.001.001.016	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	016 - 1,6 мм	без кольца	0,7 г	1,6 мм	22 мм
500.204.001.001.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	018 - 1,8 мм	без кольца	0,7 г	1,8 мм	22 мм
500.204.001.001.021	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	021 - 2,1 мм	без кольца	0,7 г	2,1 мм	22 мм
500.204.001.001.023	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	023 - 2,3 мм	без кольца	0,7 г	2,3 мм	22 мм
500.205.001.001.010	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	010 - 1,0 мм	без кольца	0,8 г	1,0 мм	26 мм
500.205.001.001.012	205-На угловой наконечник	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	012 - 1,2 мм	без кольца	0,8 г	1,2 мм	26 мм

	(длинный)							
500.205.001.001.014	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	014 - 1,4 мм	без кольца	0,8 г	1,4 мм	26 мм
500.205.001.001.016	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	016 - 1,6 мм	без кольца	0,8 г	1,6 мм	26 мм
500.205.001.001.018	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	018 - 1,8 мм	без кольца	0,8 г	1,8 мм	26 мм
500.205.001.001.021	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	021 - 2,1 мм	без кольца	0,8 г	2,1 мм	26 мм
500.205.001.001.023	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	023 - 2,3 мм	без кольца	0,8 г	2,3 мм	26 мм
500.314.001.001.006	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	006 - 0,6 мм	без кольца	0,4 г	0,6 мм	19 мм
500.314.001.001.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	0,8 мм	19 мм
500.314.001.001.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	1,0 мм	19 мм
500.314.001.001.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	1,2 мм	19 мм
500.314.001.001.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	1,4 мм	19 мм
500.314.001.001.016	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	016 - 1,6 мм	без кольца	0,4 г	1,6 мм	19 мм
500.314.001.001.018	314-На турбинный наконечник	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	018 - 1,8 мм	без кольца	0,4 г	1,8 мм	19 мм



500.314.001.001.021	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	021 - 2,1 мм	без кольца	0,4 г	2,1 мм	19 мм
500.314.001.001.023	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	023 - 2,3 мм	без кольца	0,4 г	2,3 мм	19 мм
500.316.001.001.010	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	010 - 1,0 мм	без кольца	0,5 г	1,0 мм	25 мм
500.316.001.001.012	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	012 - 1,2 мм	без кольца	0,5 г	1,2 мм	25 мм
500.316.001.001.014	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	014 - 1,4 мм	без кольца	0,5 г	1,4 мм	25 мм
500.316.001.001.016	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	016 - 1,6 мм	без кольца	0,5 г	1,6 мм	25 мм
500.316.001.001.018	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	018 - 1,8 мм	без кольца	0,5 г	1,8 мм	25 мм
500.316.001.001.021	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	021 - 2,1 мм	без кольца	0,5 г	2,1 мм	25 мм
500.316.001.001.023	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	001 - прямые зубцы	023 - 2,3 мм	без кольца	0,5 г	2,3 мм	25 мм
500.204.001.003.005	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	005 - 0,5 мм	зеленое кольцо	0,7 г	0,5 мм	22 мм
500.204.001.003.007	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	007 - 0,7 мм	зеленое кольцо	0,7 г	0,7 мм	22 мм
500.204.001.003.010	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	010 - 1,0 мм	зеленое кольцо	0,7 г	1,0 мм	22 мм
500.204.001.003.012	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	012 - 1,2 мм	зеленое кольцо	0,7 г	1,2 мм	22 мм

500.204.001.003.014	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	014 - 1,4 мм	зеленое кольцо	0,7 г	1,4 мм	22 мм
500.204.001.003.016	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	016 - 1,6 мм	зеленое кольцо	0,7 г	1,6 мм	22 мм
500.204.001.003.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	018 - 1,8 мм	зеленое кольцо	0,7 г	1,8 мм	22 мм
500.204.001.003.021	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	021 - 2,1 мм	зеленое кольцо	0,7 г	2,1 мм	22 мм
500.204.001.003.023	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	023 - 2,3 мм	зеленое кольцо	0,7 г	2,3 мм	22 мм
500.204.001.003.025	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	025 - 2,5 мм	зеленое кольцо	0,7 г	2,5 мм	22 мм
500.204.001.003.027	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	027 - 2,7 мм	зеленое кольцо	0,7 г	2,7 мм	22 мм
500.204.001.003.029	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	029 - 2,9 мм	зеленое кольцо	0,7 г	2,9 мм	22 мм
500.205.001.003.010	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	010 - 1,0 мм	зеленое кольцо	0,8 г	1,0 мм	26 мм
500.205.001.003.012	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	012 - 1,2 мм	зеленое кольцо	0,8 г	1,2 мм	26 мм
500.205.001.003.014	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	014 - 1,4 мм	зеленое кольцо	0,8 г	1,4 мм	26 мм
500.205.001.003.016	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	016 - 1,6 мм	зеленое кольцо	0,8 г	1,6 мм	26 мм
500.205.001.003.018	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	018 - 1,8 мм	зеленое кольцо	0,8 г	1,8 мм	26 мм



500.205.001.003.021	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	021 - 2,1 мм	зеленое кольцо	0,8 г	2,1 мм	26 мм
500.205.001.003.023	205-На угловой наконечник (длинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	023 - 2,3 мм	зеленое кольцо	0,8 г	2,3 мм	26 мм
500.314.001.003.006	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	006 - 0,6 мм	зеленое кольцо	0,4 г	0,6 мм	19 мм
500.314.001.003.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	008 - 0,8 мм	зеленое кольцо	0,4 г	0,8 мм	19 мм
500.314.001.003.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	010 - 1,0 мм	зеленое кольцо	0,4 г	1,0 мм	19 мм
500.314.001.003.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	012 - 1,2 мм	зеленое кольцо	0,4 г	1,2 мм	19 мм
500.314.001.003.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	014 - 1,4 мм	зеленое кольцо	0,4 г	1,4 мм	19 мм
500.314.001.003.016	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	016 - 1,6 мм	зеленое кольцо	0,4 г	1,6 мм	19 мм
500.314.001.003.018	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	018 - 1,8 мм	зеленое кольцо	0,4 г	1,8 мм	19 мм
500.314.001.003.021	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	021 - 2,1 мм	зеленое кольцо	0,4 г	2,1 мм	19 мм
500.314.001.003.023	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	023 - 2,3 мм	зеленое кольцо	0,4 г	2,3 мм	19 мм
500.316.001.003.010	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	010 - 1,0 мм	зеленое кольцо	0,5 г	1,0 мм	25 мм
500.316.001.003.012	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	012 - 1,2 мм	зеленое кольцо	0,5 г	1,2 мм	25 мм

500.316.001.003.014	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	014 - 1,4 мм	зеленое кольцо	0,5 г	1,4 мм	25 мм
500.316.001.003.016	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	016 - 1,6 мм	зеленое кольцо	0,5 г	1,6 мм	25 мм
500.316.001.003.018	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	018 - 1,8 мм	зеленое кольцо	0,5 г	1,8 мм	25 мм
500.316.001.003.021	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	021 - 2,1 мм	зеленое кольцо	0,5 г	2,1 мм	25 мм
500.316.001.003.023	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	001-Сферическая (круглая)	003 - прямая, острый режущий угол	023 - 2,3 мм	зеленое кольцо	0,5 г	2,3 мм	25 мм
500.204.004.003.010	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	010 - 1,0 мм	без кольца/зел еное кольцо	0,7 г	1,0 мм	22 мм
500.204.004.003.012	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	012 - 1,2 мм	без кольца/зел еное кольцо	0,7 г	1,2 мм	22 мм
500.204.004.003.014	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	014 - 1,4 мм	без кольца/зел еное кольцо	0,7 г	1,4 мм	22 мм
500.204.004.003.016	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	016 - 1,6 мм	без кольца/зел еное кольцо	0,7 г	1,6 мм	22 мм
500.204.004.003.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	018 - 1,8 мм	без кольца/зел еное кольцо	0,7 г	1,8 мм	22 мм
500.204.004.003.021	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	021 - 2,1 мм	без кольца/зел еное кольцо	0,7 г	2,1 мм	22 мм




500.204.004.003.023	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	023 - 2,3 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,7 г	2,3 мм	22 мм
500.205.004.003.010	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	010 - 1,0 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,8 г	1,0 мм	26 мм
500.205.004.003.012	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	012 - 1,2 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,8 г	1,2 мм	26 мм
500.205.004.003.014	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	014 - 1,4 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,8 г	1,4 мм	26 мм
500.205.004.003.016	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	016 - 1,6 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,8 г	1,6 мм	26 мм
500.205.004.003.018	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	018 - 1,8 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,8 г	1,8 мм	26 мм
500.205.004.003.021	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	021 - 2,1 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,8 г	2,1 мм	26 мм
500.205.004.003.023	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	003 - прямая, острый режущий угол	023 - 2,3 мм	без кольца/зеленое кольцо	0,8 г	2,3 мм	26 мм
500.204.004.002.010	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	010 - 1,0 мм	синее кольцо	0,7 г	1,0 мм	22 мм
500.204.004.002.012	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	012 - 1,2 мм	синее кольцо	0,7 г	1,2 мм	22 мм

500.204.004.002.014	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	014 - 1,4 мм	синее кольцо	0,7 г	1,4 мм	22 мм
500.204.004.002.016	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	016 - 1,6 мм	синее кольцо	0,7 г	1,6 мм	22 мм
500.204.004.002.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	018 - 1,8 мм	синее кольцо	0,7 г	1,8 мм	22 мм
500.204.004.002.021	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	021 - 2,1 мм	синее кольцо	0,7 г	2,1 мм	22 мм
500.204.004.002.023	204-На угловой наконечник (стандарт)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	023 - 2,3 мм	синее кольцо	0,7 г	2,3 мм	22 мм
500.205.004.002.010	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	010 - 1,0 мм	синее кольцо	0,8 г	1,0 мм	26 мм
500.205.004.002.012	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	012 - 1,2 мм	синее кольцо	0,8 г	1,2 мм	26 мм
500.205.004.002.014	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	014 - 1,4 мм	синее кольцо	0,8 г	1,4 мм	26 мм
500.205.004.002.016	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	016 - 1,6 мм	синее кольцо	0,8 г	1,6 мм	26 мм
500.205.004.002.018	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	018 - 1,8 мм	синее кольцо	0,8 г	1,8 мм	26 мм
500.205.004.002.021	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	021 - 2,1 мм	синее кольцо	0,8 г	2,1 мм	26 мм
500.205.004.002.023	205-На угловой наконечник (длинный)	004-Сферическая длинная шейка	002 - прямая, левая поперечная	023 - 2,3 мм	синее кольцо	0,8 г	2,3 мм	26 мм
500.204.001.002.010	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая круглая	002 - прямая, левая поперечная	010 - 1,0 мм	синее кольцо	0,7 г	1,0 мм	22 мм



500.204.001.002.012	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	012 - 1,2 мм	синее кольцо	0,7 г	1,2 мм	22 мм
500.204.001.002.014	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	014 - 1,4 мм	синее кольцо	0,7 г	1,4 мм	22 мм
500.204.001.002.016	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	016 - 1,6 мм	синее кольцо	0,7 г	1,6 мм	22 мм
500.204.001.002.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	018 - 1,8 мм	синее кольцо	0,7 г	1,8 мм	22 мм
500.204.001.002.021	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	021 - 2,1 мм	синее кольцо	0,7 г	2,1 мм	22 мм
500.204.001.002.023	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	023 - 2,3 мм	синее кольцо	0,7 г	2,3 мм	22 мм
500.204.001.002.025	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	025 - 2,5 мм	синее кольцо	0,7 г	2,5 мм	22 мм
500.204.001.002.027	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	027 - 2,7 мм	синее кольцо	0,7 г	2,7 мм	22 мм
500.204.001.002.029	204-На угловой наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	002 - прямая, левая поперечная	029 - 2,9 мм	синее кольцо	0,7 г	2,9 мм	22 мм
500.314.010.006.006	314-На турбинный наконечник (стандарт)	010-Обратноконусная	006 - правая спиральная	006 - 0,6 мм	без кольца	0,4 г	0,6 мм	19 мм
500.314.010.006.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	010-Обратноконусная	006 - правая спиральная	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	0,8 мм	19 мм
500.314.010.006.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	010-Обратноконусная	006 - правая спиральная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	1,0 мм	19 мм
500.314.010.006.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	010-Обратноконусная	006 - правая спиральная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	1,2 мм	19 мм

500.314.010.006.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	1,4 мм	19 мм
500.314.010.006.016	314-На турбинный наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	016 - 1,6 мм	без кольца	0,4 г	1,6 мм	19 мм
500.314.010.006.018	314-На турбинный наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	018 - 1,8 мм	без кольца	0,4 г	1,8 мм	19 мм
500.204.010.006.008	204-На угловой наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	008 - 0,8 мм	без кольца	0,7 г	0,8 мм	22 мм
500.204.010.006.010	204-На угловой наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,7 г	1,0 мм	22 мм
500.204.010.006.012	204-На угловой наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,7 г	1,2 мм	22 мм
500.204.010.006.014	204-На угловой наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	014 - 1,4 мм	без кольца	0,7 г	1,4 мм	22 мм
500.204.010.006.016	204-На угловой наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	016 - 1,6 мм	без кольца	0,7 г	1,6 мм	22 мм
500.204.010.006.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	010- Обратноконусная	006 - правая спиральная	018 - 1,8 мм	без кольца	0,7 г	1,8 мм	22 мм
500.314.107.006.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	006 - правая спиральная	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	3,4 мм	19 мм
500.314.107.006.009	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	006 - правая спиральная	009 - 0,9 мм	без кольца	0,4 г	3,4 мм	19 мм
500.314.107.006.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	006 - правая спиральная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	3,4 мм	19 мм
500.314.107.006.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	006 - правая спиральная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	4,2 мм	19 мм

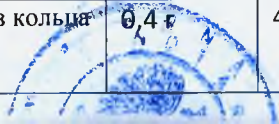



500.314.107.006.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	006 - правая спиральная	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	4,2 мм	19 мм
500.314.107.006.016	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	006 - правая спиральная	016 - 1,6 мм	без кольца	0,4 г	4,2 мм	19 мм
500.314.110.006.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	006 - правая спиральная	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	6,0 мм	19 мм
500.314.110.006.009	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	006 - правая спиральная	009 - 0,9 мм	без кольца	0,4 г	6,0 мм	19 мм
500.314.110.006.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	006 - правая спиральная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	6,0 мм	19 мм
500.314.110.006.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	006 - правая спиральная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	6,0 мм	19 мм
500.314.110.006.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	006 - правая спиральная	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм
500.314.110.006.016	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	006 - правая спиральная	016 - 1,6 мм	без кольца	0,4 г	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм
500.314.137.006.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	137-Цилиндрическая, полусферический конец	006 - правая спиральная	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	3,6 мм	19 мм
500.314.137.006.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	137-Цилиндрическая, полусферический конец	006 - правая спиральная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.137.006.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	137-Цилиндрическая, полусферический конец	006 - правая спиральная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм


500.314.137.006.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	137-Цилиндрическая, полусферический конец	006 - правая спиральная	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	4,5 мм	19 мм
500.314.137.006.016	314-На турбинный наконечник (стандарт)	137-Цилиндрическая, полусферический конец	006 - правая спиральная	016 - 1,6 мм	без кольца	0,4 г	4,5 мм	19 мм
500.314.168.006.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	168-Конусная (усеченная конусная)	006 - правая спиральная	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	3,6 мм	19 мм
500.314.168.006.009	314-На турбинный наконечник (стандарт)	168-Конусная (усеченная конусная)	006 - правая спиральная	009 - 0,9 мм	без кольца	0,4 г	3,8 мм	19 мм
500.314.168.006.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	168-Конусная (усеченная конусная)	006 - правая спиральная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.168.006.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	168-Конусная (усеченная конусная)	006 - правая спиральная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.171.006.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	171-Конусная (усеченная конусная) 5,5<l≤7,5 мм	006 - правая спиральная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	5,5<l≤7,5 мм	19 мм
500.314.171.006.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	171-Конусная (усеченная конусная) 5,5<l≤7,5 мм	006 - правая спиральная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	5,5<l≤7,5 мм	19 мм
500.314.107.007.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	007 - правая спиральная, левая поперечная	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.107.007.009	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	007 - правая спиральная, левая поперечная	009 - 0,9 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.107.007.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	007 - правая спиральная, левая поперечная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.107.007.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	007 - правая спиральная, левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.107.007.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	107-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое	007 - правая спиральная, левая поперечная	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм



500.314.110.007.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	007 - правая спиральная, левая поперечная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм
500.314.110.007.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	110-Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое $5,5 < l \leq 7,5$ мм	007 - правая спиральная, левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм
500.314.168.007.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	168-Конусная (усеченная конусная)	007 - правая спиральная, левая поперечная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.168.007.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	168-Конусная (усеченная конусная)	007 - правая спиральная, левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	4,1 мм	19 мм
500.314.171.007.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	171-Конусная (усеченная конусная) $5,5 < l \leq 7,5$ мм	007 - правая спиральная, левая поперечная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм
500.314.171.007.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	171-Конусная (усеченная конусная) $5,5 < l \leq 7,5$ мм	007 - правая спиральная, левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	19 мм
500.316.171.007.016	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	171-Конусная (усеченная конусная) $5,5 < l \leq 7,5$ мм	007 - правая спиральная, левая поперечная	016 - 1,6 мм	без кольца	0,5 г	$5,5 < l \leq 7,5$ мм	25 мм
500.314.232.001.006	314-На турбинный наконечник (стандарт)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	001 - прямые зубцы	006 - 0,6 мм	без кольца	0,4 г	1,7 мм	19 мм
500.314.232.001.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	001 - прямые зубцы	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г	1,8 мм	19 мм
500.314.232.001.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	232-Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	001 - прямые зубцы	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	2,0 мм	19 мм


500.314.232.001.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	232- Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	001 - прямые зубцы	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	2,2 мм	19 мм
500.314.232.003.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	232- Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	003 - прямая, острый режущий угол	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	1,7 мм	19 мм
500.314.232.003.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	232- Обратноконусная, вогнутый конец, закругленная кромка, короткая	003 - прямая, острый режущий угол	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	2,2 мм	19 мм
500.316.210.295.014	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	210-конусная, острый конец $7,5 < l \leq 9,5$ мм	295 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,5 г	$7,5 < l \leq 9,5$ мм	25 мм
500.316.210.295.016	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	210-конусная, острый конец $7,5 < l \leq 9,5$ мм	295 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя	016 - 1,6 мм	без кольца	0,5 г	$7,5 < l \leq 9,5$ мм	25 мм
500.314.265.071.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	265- Конусная длинная шейка	071- для финишного бора: прямая, средняя	008 - 0,8 мм	без кольца	0,4 г		19 мм
500.314.265.031.008	314-На турбинный наконечник (стандарт)	265- Конусная длинная шейка	031 - для финишного бора: прямая очень тонкая	008 - 0,8 мм	белое кольцо	0,4 г		19 мм
500.314.164.071.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	164 - конусная, заостренная, тонкая $3,5 < l \leq 6,5$ мм	071- для финишного бора: прямая, средняя	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	$3,5 < l \leq 6,5$ мм	19 мм
500.314.164.031.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	164 - конусная, заостренная, тонкая $3,5 < l \leq 6,5$ мм	031 - для финишного бора: прямая очень тонкая	010 - 1,0 мм	белое кольцо	0,4 г	$3,5 < l \leq 6,5$ мм	19 мм
500.314.164.071.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	164 - конусная, заостренная, тонкая $3,5 < l \leq 6,5$ мм	071- для финишного бора: прямая, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	$3,5 < l \leq 6,5$ мм	19 мм



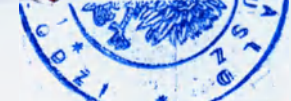

500.314.164.031.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	164 - конусная, заостренная, тонкая $3,5 < l \leq 6,5$ мм	031 - для финишного бора: прямая очень тонкая	014 - 1,4 мм	белое кольцо	0,4 г	$3,5 < l \leq 6,5$ мм	19 мм
500.316.166.041.014	314-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	166-Конусная, заостренная тонкая $8,5 < l \leq 10,5$ мм	041- для финишного бора: прямая, тонкая	014 - 1,4 мм	желтое кольцо	0,5 г	$8,5 < l \leq 10,5$ мм	25 мм
500.314.166.031.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	166-Конусная, заостренная тонкая $8,5 < l \leq 10,5$ мм	031 - для финишного бора: прямая очень тонкая	014 - 1,4 мм	белое кольцо	0,4 г	$8,5 < l \leq 10,5$ мм	19 мм
500.204.496.071.009	204-На угловой наконечник (стандарт)	496- заостренная, короткая $l \leq 3d$	071- для финишного бора: прямая, средняя	009 - 0,9 мм	без кольца	0,7 г	3,6 мм	22 мм
500.314.496.071.009	314-На турбинный наконечник (стандарт)	496- заостренная, короткая $l \leq 3d$	071- для финишного бора: прямая, средняя	009 - 0,9 мм	без кольца	0,4 г	3,6 мм	19 мм
500.314.496.031.009	314-На турбинный наконечник (стандарт)	496- заостренная, короткая $l \leq 3d$	031 - для финишного бора: прямая очень тонкая	009 - 0,9 мм	белое кольцо	0,4 г	3,6 мм	19 мм
500.314.496.031.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	496- заостренная, короткая $l \leq 3d$	031 - для финишного бора: прямая очень тонкая	010 - 1,0 мм	белое кольцо	0,4 г	3,6 мм	19 мм
500.314.496.071.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	496- заостренная, короткая $l \leq 3d$	071- для финишного бора: прямая, средняя	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	3,6 мм	19 мм
500.314.496.071.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	496- заостренная, короткая $l \leq 3d$	071- для финишного бора: прямая, средняя	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	3,6 мм	19 мм
500.314.195.041.009	314-На турбинный наконечник (стандарт)	195-Конусная, куполообразный (полусферический) конец $l \leq 3,5$ мм	041- для финишного бора: прямая, тонкая	009 - 0,9 мм	желтое кольцо	0,4 г	$l \leq 3,5$ мм	19 мм
500.204.289.072.012	204-На угловой наконечник (стандарт)	289-торпеда цилиндрическая $7,5 < l \leq 9,5$ мм	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	012 - 1,2 мм	без кольца	0,7 г	$7,5 < l \leq 9,5$ мм	22 мм
500.314.289.072.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	289-торпеда цилиндрическая $7,5 < l \leq 9,5$ мм	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	$7,5 < l \leq 9,5$ мм	19 мм


500.314.289.072.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	289-торпеда цилиндрическая 7,5<L≤9,5 мм	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	7,5<L≤9,5 мм	19 мм
500.314.290.072.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	290-торпеда цилиндрическая 9,5<L≤11,5 мм	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	9,5<L≤11,5 мм	19 мм
500.204.277.072.014	204-На угловой наконечник (стандарт)	277-Яйцо	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,7 г	3,1 мм	22 мм
500.204.277.072.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	277-Яйцо	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	018 - 1,8 мм	без кольца	0,7 г	3,5 мм	22 мм
500.204.277.072.023	204-На угловой наконечник (стандарт)	277-Яйцо	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	023 - 2,3 мм	без кольца	0,7 г	4,2 мм	22 мм
500.314.277.072.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	3,1 мм	19 мм
500.314.277.042.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	042- для финишного бора: правая спиральная, тонкая	014 - 1,4 мм	желтое кольцо	0,4 г	3,1 мм	19 мм
500.314.277.032.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	032 - для финишного бора: правая спиральная, очень тонкая	014 - 1,4 мм	белое кольцо	0,4 г	3,1 мм	19 мм
500.314.277.072.018	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	018 - 1,8 мм	без кольца	0,4 г	3,5 мм	19 мм
500.314.277.042.018	314-На турбинный наконечник	277-Яйцо	042- для финишного бора: правая спиральная, тонкая	018 - 1,8 мм	желтое кольцо	0,4 г	3,5 мм	19 мм

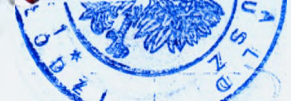

500.314.277.032.018	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	032 - для финишного бора: правая спиральная, очень тонкая	018 - 1,8 мм	белое кольцо	0,4 г	3,5 мм	19 мм
500.314.277.072.023	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	023 - 2,3 мм	без кольца	0,4 г	4,2 мм	19 мм
500.314.277.042.023	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	042- для финишного бора: правая спиральная, тонкая	023 - 2,3 мм	желтое кольцо	0,4 г	4,2 мм	19 мм
500.314.277.032.023	314-На турбинный наконечник (стандарт)	277-Яйцо	032 - для финишного бора: правая спиральная, очень тонкая	023 - 2,3 мм	белое кольцо	0,4 г	4,2 мм	19 мм
500.314.279.072.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	279-Яйцо, боковое резание	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	3,1 мм	19 мм
500.314.001.071.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	071- для финишного бора: прямая, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	1,4 мм	19 мм
500.314.001.071.018	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	071- для финишного бора: прямая, средняя	018 - 1,8 мм	без кольца	0,4 г	1,8 мм	19 мм
500.314.001.071.023	314-На турбинный наконечник (стандарт)	001-Сферическая (круглая)	071- для финишного бора: прямая, средняя	023 - 2,3 мм	без кольца	0,4 г	2,3 мм	19 мм
500.314.254.032.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	254-Почка	032 - для финишного бора: правая спиральная, очень тонкая	014 - 1,4 мм	белое кольцо	0,4 г	3,5 мм	19 мм
500.204.254.072.018	204-На угловой наконечник (стандарт)	254-Почка	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	018 - 1,8 мм	без кольца	0,7 г		22 мм
500.314.254.072.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	254-Почка	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	014 - 1,4 мм	без кольца	0,4 г	3,5 мм	19 мм


500.314.254.072.018	314-На турбинный наконечник (стандарт)	254-Почка	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	018 - 1,8 мм	без кольца	0,4 г		19 мм
500.314.254.072.023	314-На турбинный наконечник (стандарт)	254-Почка	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	023 - 2,3 мм	без кольца	0,4 г		19 мм
500.314.249.072.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная 7,5<1≤9,5 мм	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	7,5<1≤9,5 мм	19 мм
500.314.249.042.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная 7,5<1≤9,5 мм	042- для финишного бора: правая спиральная, тонкая	010 - 1,0 мм	желтое кольцо	0,4 г	7,5<1≤9,5 мм	19 мм
500.314.249.032.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная 7,5<1≤9,5 мм	032 - для финишного бора: правая спиральная, очень тонкая	010 - 1,0 мм	белое кольцо	0,4 г	7,5<1≤9,5 мм	19 мм
500.314.249.072.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная 7,5<1≤9,5 мм	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	7,5<1≤9,5 мм	19 мм
500.314.249.042.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная 7,5<1≤9,5 мм	042- для финишного бора: правая спиральная, тонкая	012 - 1,2 мм	желтое кольцо	0,4 г	7,5<1≤9,5 мм	19 мм
500.314.249.032.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	249- Цилиндрическая, стрельчатый конец, длинная 7,5<1≤9,5 мм	032 - для финишного бора: правая спиральная, очень тонкая	012 - 1,2 мм	белое кольцо	0,4 г	7,5<1≤9,5 мм	19 мм
500.314.138.008.010	314-На турбинный наконечник (стандарт)	138-Цилиндрическая, полусферический конец 1≤3,5 мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,4 г	1≤3,5 мм	19 мм
500.314.138.008.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	138-Цилиндрическая, полусферический конец 1≤3,5 мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	1≤3,5 мм	19 мм
500.316.138.008.010	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	138-Цилиндрическая, полусферический конец 1≤3,5 мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	010 - 1,0 мм	без кольца	0,5 г	1≤3,5 мм	25 мм




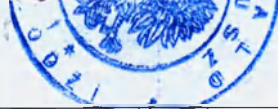

500.316.138.008.012	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	138-Цилиндрическая, полусферический конец $l \leq 3,5$ мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,5 г	$l \leq 3,5$ мм	25 мм
500.314.139.008.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	139-Цилиндрическая, полусферический конец $3,5 < l \leq 5,5$ мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	$3,5 < l \leq 5,5$ мм	19 мм
500.316.139.008.016	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	139-Цилиндрическая, полусферический конец $3,5 < l \leq 5,5$ мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	016 - 1,6 мм	без кольца	0,5 г	$3,5 < l \leq 5,5$ мм	25 мм
500.314.194.019.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	194-Конусная, куполообразный (полусферический) конец	019 - правая спиральная, двойное спиральное симметричное резание	012 - 1,2 мм	синее кольцо	0,4 г	4,0 мм	19 мм
500.314.194.019.014	314-На турбинный наконечник (стандарт)	194-Конусная, куполообразный (полусферический) конец	019 - правая спиральная, двойное спиральное симметричное резание	014 - 1,4 мм	синее кольцо	0,4 г	4,0 мм	19 мм
500.316.194.019.012	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	194-Конусная, куполообразный (полусферический) конец	019 - правая спиральная, двойное спиральное симметричное резание	012 - 1,2 мм	синее кольцо	0,5 г	4,0 мм	25 мм
500.316.194.019.014	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	194-Конусная, куполообразный (полусферический) конец	019 - правая спиральная, двойное спиральное симметричное резание	014 - 1,4 мм	синее кольцо	0,5 г	4,0 мм	25 мм
500.314.139.008.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	139-Цилиндрическая, полусферический конец $3,5 < l \leq 5,5$ мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	$3,5 < l \leq 5,5$ мм	19 мм
500.316.139.008.012	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	139-Цилиндрическая, полусферический конец $3,5 < l \leq 5,5$ мм	008 - правая спиральная, тонкая левая поперечная	012 - 1,2 мм	без кольца	0,5 г	$3,5 < l \leq 5,5$ мм	25 мм
500.104.408.297.016	104 - На прямой наконечник (стандартный)	408 - костная фреза, конусо заостренная $7 < l \leq 9$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка	016 - 1,6 мм	без кольца	2,5 г	$7 < l \leq 9$ мм	44,5 мм

			зубчиков пилы					
500.205.408.297.016	205-На угловой наконечник (длинный)	408 - костная фреза, конусо заостренная $7 < l \leq 9$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	016 - 1,6 мм	без кольца	0,8 г	$7 < l \leq 9$ мм	26 мм
500.206.408.297.016	206-На угловой наконечник (сверхдлинный)	408 - костная фреза, конусо заостренная $7 < l \leq 9$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	016 - 1,6 мм	без кольца	0,9 г	$7 < l \leq 9$ мм	34 мм
500.316.408.297.016	316-На турбинный наконечник (сверхдлинный)	408 - костная фреза, конусо заостренная $7 < l \leq 9$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	016 - 1,6 мм	без кольца	0,5 г	$7 < l \leq 9$ мм	25 мм
500.104.406.297.014	104 - На прямой наконечник (стандартный)	406 - костная фреза, конусо заостренная $l \leq 5$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	014 - 1,4 мм	без кольца	2,5 г	$l \leq 5$ мм	44,5 мм
500.205.406.297.014	205-На угловой наконечник (длинный)	406 - костная фреза, конусо заостренная $l \leq 5$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	014 - 1,4 мм	без кольца	0,8 г	$l \leq 5$ мм	26 мм
500.104.407.297.010	104 - На прямой наконечник (стандартный)	407 - костная фреза, конусо заостренная $5 < l \leq 7$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	010 - 1,0 мм	без кольца	2,5 г	$5 < l \leq 7$ мм	44,5 мм

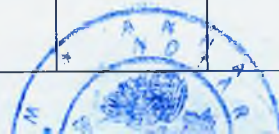

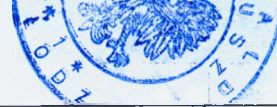

500.205.407.297.010	205-На угловой наконечник (длинный)	407 - костная фреза, конусо заостренная $5 < l \leq 7$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	010 - 1,0 мм	без кольца	0,8 г	$5 < l \leq 7$ мм	26 мм
500.206.407.297.010	206-На угловой наконечник (сверхдлинный)	407 - костная фреза, конусо заостренная $5 < l \leq 7$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	010 - 1,0 мм	без кольца	0,9 г	$5 < l \leq 7$ мм	34 мм
500.104.408.297.023	104 - На прямой наконечник (стандартный)	408 - костная фреза, конусо заостренная $7 < l \leq 9$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	023 - 2,3 мм	без кольца	2,5 г	$7 < l \leq 9$ мм	44,5 мм
500.205.408.297.023	205-На угловой наконечник (длинный)	408 - костная фреза, конусо заостренная $7 < l \leq 9$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	023 - 2,3 мм	без кольца	0,8 г	$7 < l \leq 9$ мм	26 мм
500.104.409.297.021	104 - На прямой наконечник (стандартный)	409 - костная фреза, конусо заостренная $9 < l \leq 10$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	021 - 2,1 мм	без кольца	2,5 г	$9 < l \leq 10$ мм	44,5 мм
500.206.409.297.021	206-На угловой наконечник (сверхдлинный)	409 - костная фреза, конусо заостренная $9 < l \leq 10$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	021 - 2,1 мм	без кольца	0,9 г	$9 < l \leq 10$ мм	34 мм
500.205.409.297.021	205-На угловой наконечник (длинный)	409 - костная фреза, конусо заостренная $9 < l \leq 10$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная,	021 - 2,1 мм	без кольца	0,8 г	$9 < l \leq 10$ мм	26 мм

			средняя, нарезка зубчиков пилы					
500.104.410.297.023	104 - На прямой наконечник (стандартный)	410 - костная фреза, конусо заостренная $10 < l \leq 11$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	023 - 2,3 мм	без кольца	2,5 г	$10 < l \leq 11$ мм	44,5 мм
500.205.410.297.023	205-На угловой наконечник (длинный)	410 - костная фреза, конусо заостренная $10 < l \leq 11$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	023 - 2,3 мм	без кольца	0,8 г	$10 < l \leq 11$ мм	26 мм
500.206.410.297.023	206-На угловой наконечник (сверхдлинный)	410 - костная фреза, конусо заостренная $10 < l \leq 11$ мм	297 - для хирургических инструментов: правая спиральная, средняя, нарезка зубчиков пилы	023 - 2,3 мм	без кольца	0,9 г	$10 < l \leq 11$ мм	34 мм
500.314.238.072.012	314-На турбинный наконечник (стандарт)	238 - Гуша $3d < l$	072 - для финишного бора: правая спиральная, средняя	012 - 1,2 мм	без кольца	0,4 г	1,2 мм	19 мм



REPERTORIUM A NR 2098/2018

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.04.2018) ja, niżej podpisana ANNA BALD - notariusz poświadczam, że dokument ten, w mojej obecności w mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod nr 7 uznała za własnoręcznie podpisany-----

KATARZYNA ZOFIA WŁODARCZYK, córka Kazimierza i Zofii (ASU 291299, PESEL 80030908105) - działająca w imieniu i na rzecz **IQDENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Ks. Hugona Kollątaja pod nr 8/4** [NIP 7252103766], wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584723 – jako Prezes Zarządu, uprawniona do samodzielnej reprezentacji Spółki - stosownie do danych zawartych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
Tożsamość wyżej wymienionego ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego powołanego przy nazwisku. -----

Pobrano: tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 24,60 złotych, w tym podatek VAT 4,60 złotych (23% od kwoty 20,00 złotych) stosownie do §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.nr 148 poz.1564) oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535). -----



NOTARIUSZ
Anna Bald
Anna Bald

Перевод с польского языка на русский язык

/Подпись/

Катажина Влодарчик

18.04.2018

Штамп: Регистрационный номер: 2098/2018

Печать на сгибе каждой страницы: Анна Бальд. Нотариус в г. Лодзь

/Подпись на 19 стр /
Катажина Влодарчик

Печать на сгибе страницы: Анна Бальд. Нотариус в г. Лодзь

Печать на сгибе страницы: Анна Бальд. Нотариус в г. Лодзь

/Подпись/

Катажина Влодарчик

Штамп компании: IQDENT Sp. z o.o. / АЙКЬЮДЕНТ Сп. з.о.о.

Ул. Коллатая 8 лок.4, 91-427 г. Лодзь

ИНН 725-210-37-66, REGON: 362935470

Тел.: +48 733 10 20 21

Штамп:

Анна Бальд нотариус

Нотариальная контора

90-365 г. Лодзь, ул. Тименецкого 7

Тел. 42 68 00 670

ИНН: 727-153-02-68, REGON: 100384003

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 2008/2018

Двадцатого апреля две тысячи восемнадцатого года (20.04.2018) я, нижеподписавшаяся Анна Бальд, нотариус, подтверждаю, что настоящий документ в моем присутствии в нотариальной конторе на улице почтенного епископа Wincentego Tymienieckiego под номером 7 – подписала собственноручно

Катажина Зофия Влодарчик, дочь Казимира и Зофии (ASU 291299, номер социального обеспечения 80030908105), действует от имени и в интересах Общества с ограниченной ответственностью IQDENT / АЙКЬЮДЕНТ, зарегистрированного в г. Лодзь, ул. Хугона Коллатая в № 8/4 [ИНН 7252103766], внесенного в Реестр предпринимателей Национального судебного регистра, хранящийся в районном суде в Лодзь-Средмесье в г. Лодзь, XX Департамент Национального судебного регистра под номером KRS 0000584723 - в качестве Председателя Правления, имеющего право представлять Компанию индивидуально – в соответствии с данными, содержащимися в Реестре предпринимателей Национального судебного регистра.

Подлинность вышеупомянутой информации устанавливается на основании предъявления удостоверения личности на имя названного лица.

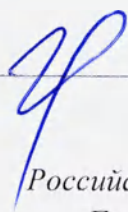
Пошлина - титульные нотариальные сборы, в том числе НДС в размере 23% от суммы взноса 24.60 злотых, в том числе НДС 4,60 злотых (23% от суммы 20,00 злотых) в соответствии с § 13 Постановления Министра юстиции от 28 июня 2004 г. (Dz.U.nr poz.1564 148) и положения Закона от 11 марта 2004 г. по налогу на товары и услуги (Законодательный вестник № 54 пункт 535).

/Подпись/

Нотариус Анна Бальд

Печать: Анна Бальд нотариус

Перевод данного текста выполнен переводчиком Фроловой Мариной Михайловной



Российская Федерация
Город Москва

Шестнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Фроловой Марины Михайловны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2018-42-2461

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.



Г.Б. Акимов

Проинуровано, пронумеровано и скреплено печатью 68 лист(-а,-ов).

Нотариус:

