


Фотоизображение медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований «Дифференциально-диагностическая питательная среда для выделения бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia* сухая» по ТУ 20.59.52-315-78095326-2019

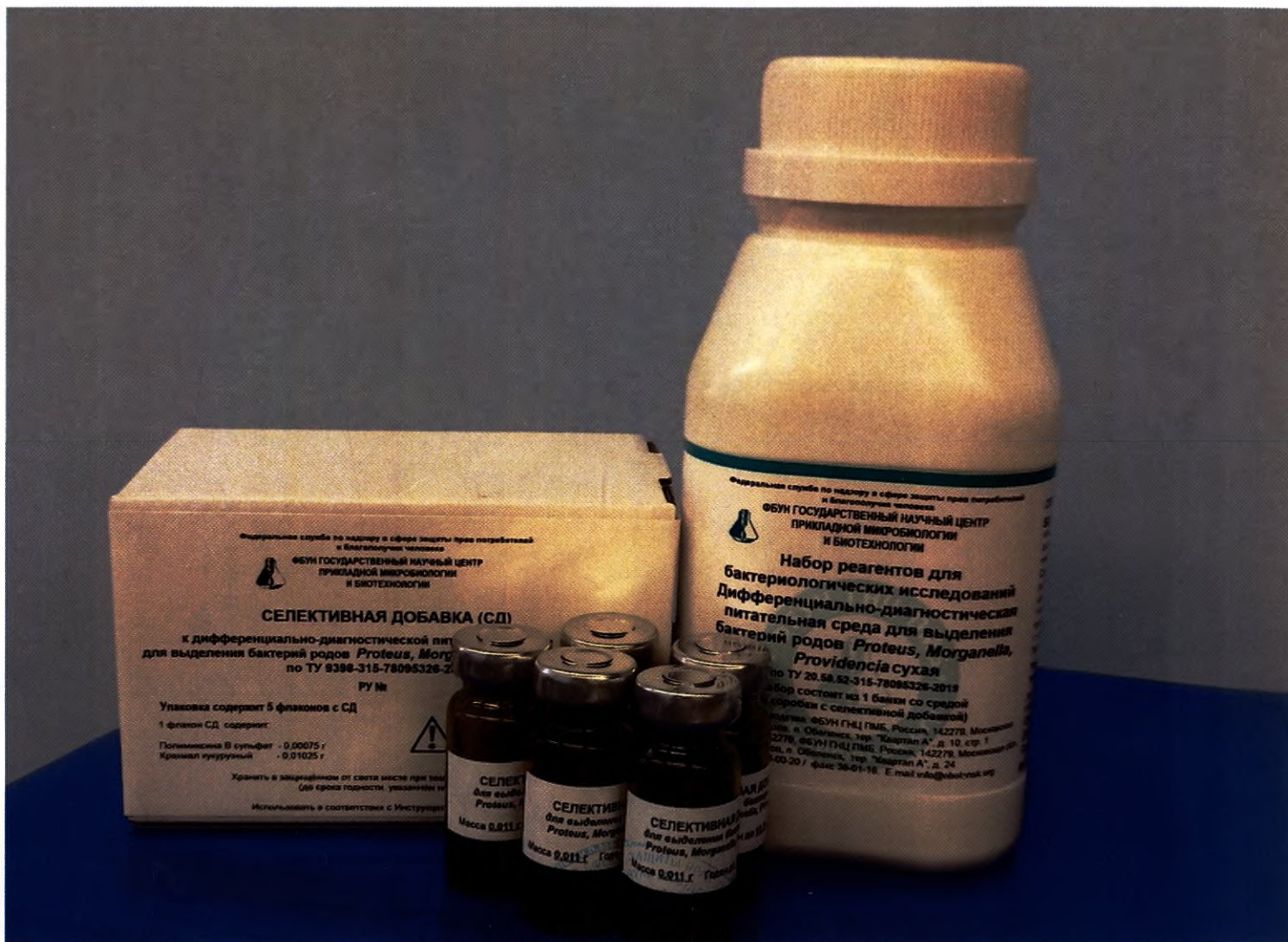

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ

И.А. Дятлов

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФБУН ГНЦ ПМБ
по научно-производственной работе

А.П. Шепелин

2020 г.



МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА БАНКУ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

СОСТАВ, г/л:

Панкреатический гидролизат	
рыбной муки сухой	5,0
Пептон мясной	5,0
Дрожжевой экстракт	1,0
Натрий хлористый	4,0
Д(-) маннит	10,0
Д-(+)-мальтоза	10,0
Желчь крупного рогатого скота	
очищенная, сухая	6,0±2,5
Натрия тиосульфат безводный ..	0,5
Железо (III) лимонноаммиачное	2,0
Кристаллический фиолетовый ..	0,003±0,0005
Феноловый красный	0,08
Натрий углекислый	0-0,3
Агар бактериологический	13,0±3,0

pH 7,1-7,5

Препарат гигроскопичен, светочувствителен.
Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом
защищенном от света месте
при температуре от 2 до 30 °C

Рег. №

Набор реагентов для бактериологических исследований

Дифференциально-диагностическая питательная среда для выделения бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia* сухая

по ТУ 20.59.52-315-78095326-2019

(Набор состоит из 1 банки со средой
и коробки с селективной добавкой)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДЫ:

_____ г размешать в 1 л дистиллированной
воды, кипятить 2 мин до полного расплавления
агара. Стерилизовать автоклавированием при
температуре 121°C в течение 15 мин.
Содержимое флакона с селективной добавкой
растворить в 5 мл стерильной дистиллирован-
ной воды, тщательно перемешать в течение
1 мин, внести в стерильную, охлажденную до
температуры 50-55 °C среду из расчета 5 мл на
1 л среды и разлить в стерильные чашки Петри.
После застывания среды чашки подсушить.

Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального
использования

Дополнительная информация в инструкции по
применению.

Серия

Дата изготовления

Годен до

Масса нетто **250 г**

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Москов-
ская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр. 1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Московская обл.,
г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.24
(4967) тел.36-00-20 / факс 36-01-16, E.mail:info@obolensk.org

МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА ФЛАКОН

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА
для выделения *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*

Масса - 0,011 г

Годен до _____

IVD

МАКЕТ ЭТИКЕТКИ НА КОРОБКУ С СЕЛЕКТИВНОЙ ДОБАВКОЙ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД)

к дифференциально-диагностической питательной среде
для выделения бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia* сухой
по ТУ 9398-315-78095326-2019

Рег. №

Упаковка содержит 5 флаконов с СД

1 флакон СД содержит:

Полимиксина В сульфат - 0,00075 г

Крахмал кукурузный - 0,01025 г



Хранить в защищённом от света месте при температуре от 2 до 8 °С
(до срока годности, указанном на флаконе)

Только для *in vitro* диагностики
Использовать в соответствии с Инструкцией по применению

2 (9th)

Water Flow Net

22 26

