

Электрический стол для
инструментов АСС 002
(инструкция по эксплуатации)

Электрический стол для
инструментов АСС 002

ЗАО "ВАРТАМАНА ИНТЕРНЭШНЛ ТРЕДЕРС"

119334 - МОСКВА

ул. Косыгина, д. 15, офис 726

тел./факс 939-81-91, 939-85-16

E-mail: vioptiq@orc.ru


www.varthamana.com

Технические спецификации:

- 1) 220 в., 150 ватт, переменный ток, асинхронный двигатель.
- 2) Узел поднимания и опускания с регулировкой перемещения на 2 дюйма.
- 3) Соединитель D25 для подключения питания узла поднимания и опускания.
- 4) Высота узла подъема и опускания: 630 мм.
- 5) Ширина узла подъема и опускания: 330 мм.
- 6) Вес узла подъема и опускания: 15 кг.
- 7) Длина перемещения, обеспечиваемая узлом подъема и опускания: 9 дюймов (22,86 см).
- 8) Длина верхней плоскости: 600 мм.

Рабочие инструкции:

- 1) Убедитесь, что устройство подключено к сети 220 вольт.
- 2) Переместите стол вверх и вниз, осуществляя нажатие на кнопочный переключатель.

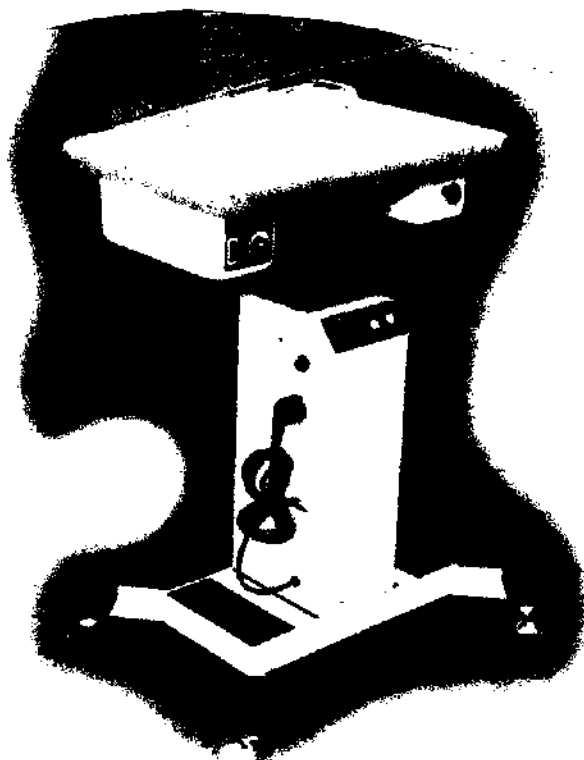

Электрический стол для инструментов АСС 002

Обеспечивает легкость и удобство в работе врачей. Возможность размещения многих приборов в том числе, автопериметра, щелевой лампы с системой архивирования, и щелевая лампа с верхним или нижним освещением. Перемещение по кабинету осуществляется с помощью колесиков. Перемещение вверх и вниз обеспечивается электроприводом, нажатием на кнопки которые расположены на лицевой панели стола, и обозначены стрелками вверх и вниз. Поднятие и опускание происходит плавно и без вибраций

Конструкционные особенности электрического стола:

Перемещение управляется электронной системой, приводимой в действие с использованием переключателя, который находится на лицевой панели.