

**Комплект силиконовый для уменьшения объёма желудка
по ТУ 9398-044-18037666-2006**

Этикетка

Комплект состоит из силиконового баллона с клапаном объёмом заполнения 400-700 мл, силиконового зонда с чехлом и трубчатым элементом с наружным диаметром 6,0 мм, длиной 740 мм, с переходником и адаптером Луер-Лок, направителя с диаметром 1,14 мм, длиной 755 мм и устройства для заполнения баллона в виде поливинилхлоридной трубки с наружным диаметром 4,0 мм, длиной 1480 мм с наконечником-шипом, двухходовым антисифонным клапаном и зажимом-клипсой.

Комплект предназначен для снижения веса пациентов за счёт частичного наполнения желудка и вызывания чувства сытости. Комплект предназначен для одноразового применения.

Комплект продезинфицирован химическим методом (3 % раствором перекиси водорода) по МУ 287-113 и готов к применению. Дополнительной обработки перед применением не требуется. При работе с комплектом не следует подвергать его кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации. Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 98 %. Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 50 % при температуре плюс 25 °С в закрытых помещениях на стеллажах в первичной упаковке, защищенной от прямого солнечного света и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделия вблизи бактерицидных ламп, открытых ёмкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Утилизация производится по СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса Б.

Срок годности комплекта - 2 года с даты изготовления, включая срок пребывания баллона в организме пациента.

Срок пребывания баллона в организме пациента - не более 6 месяцев.

Сведения о приемке ОТК

Комплект соответствует ТУ 9398-044-18037666-2006 и признан годным для эксплуатации.



Нетоксично внутри, не содержит биологические материалы и (или) наноматериалы.
Содержит лекарственное средство - присыпку детскую, порошок для наружного применения.

ОТК

Дата изготовления:

Серийный номер:

Номер партии:

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/10307 от 10 мая 2017 года

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская область, г. Мытищи,
Новомиштинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1,

тел. (495) 583 36 62, электронная почта: info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская область,
Сергиево-Посадский р-он, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24




Генеральный директор
АО «МедСил»

Д. Ю. Зыченко



Баллон с зондом и направителем

Устройство для заполнения баллона

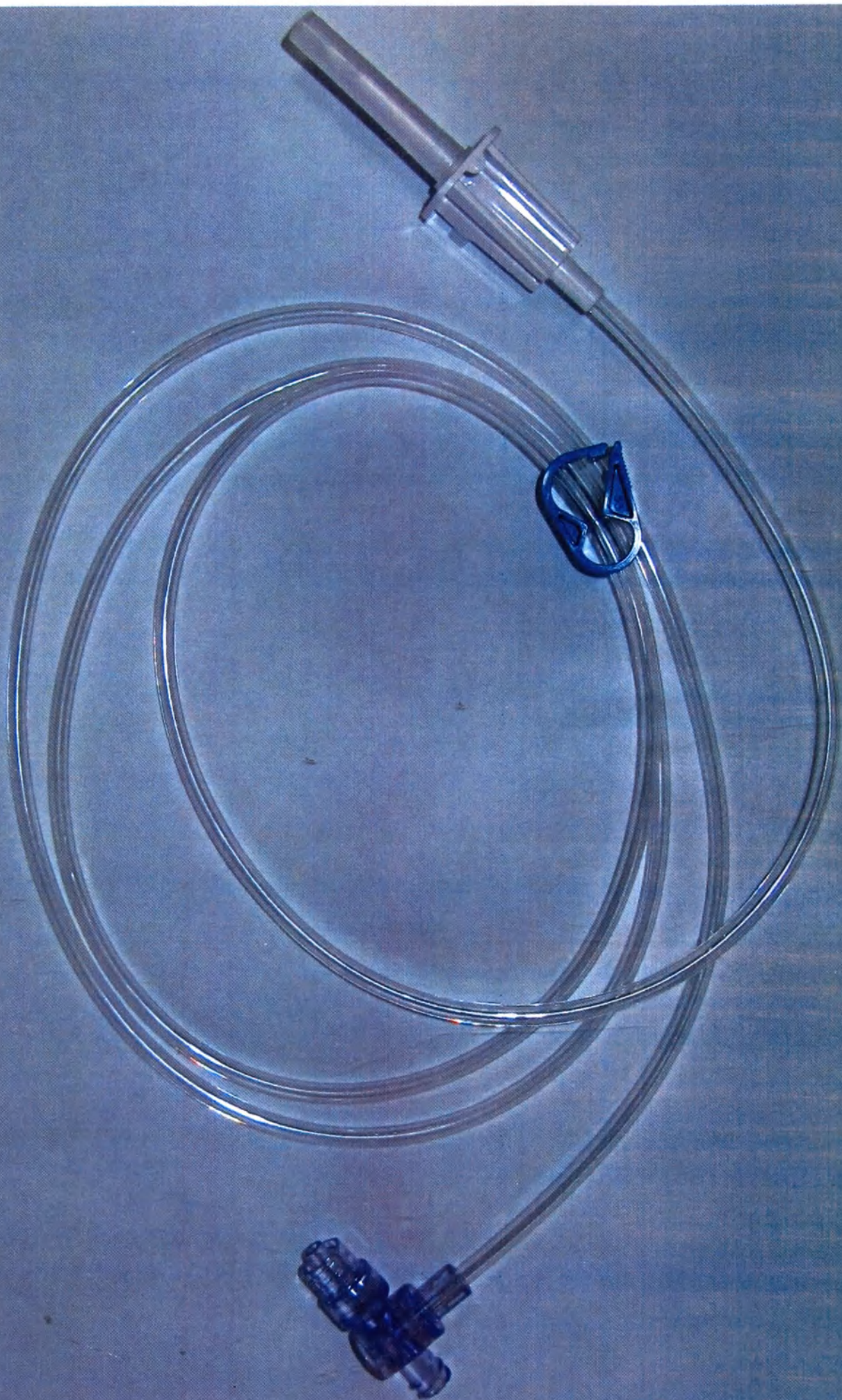

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два)

Листов(а)

Генеральный директор



Зинченко Д.Ю.