

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО НПО «Иммунотэкс»
М.В. Батурин
2021г.



**Фотографические изображения реагентов, принадлежностей, печатных материалов, а также общего вида медицинского изделия: набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))»
по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018**

1. Общий вид.




2. Планшеты полимерные разборные, состоящие (каждый) из 6 двухрядных блоков с нанесенными субстратно-индикаторными средами - 3 шт.



3. Масло вазелиновое - 1 флакон, 8 мл.



4. Реактив по Эрлиху - 1 флакон, 2,5 мл.

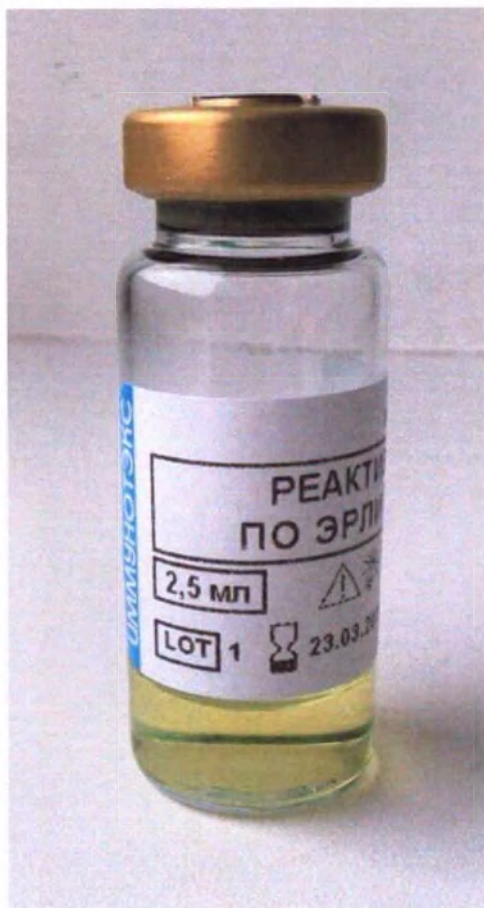

5. Раствор хлорида железа III, 10% - 1 флакон, 2,5 мл.



6. Раствор риванола, 1% - 1 флакон, 2,5 мл.




7. Раствор соляной кислоты, 1% - 1 флакон, 2,5 мл.



8. Тест-полоски «Оксидаза» - 18 шт.



9. Петли полимерные, стерильные, 1 мкл, с иглой (РУ №ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.) - 18 шт.

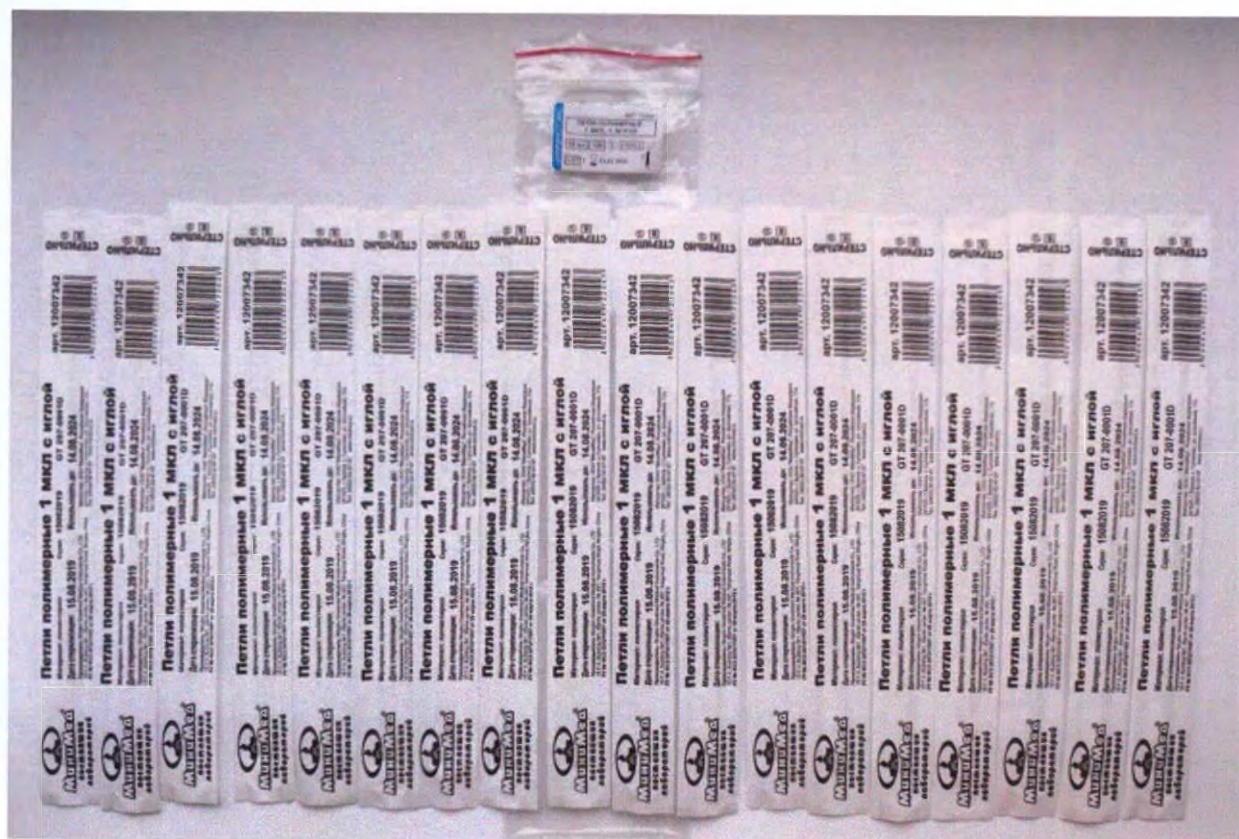


10. Защитные пленки - 3 шт.




11. Крышки-капельницы с принудительным каплеобразованием - 2 шт.



12. Непрозрачный полиэтиленовый пакет с замком, запасной - 1 шт.

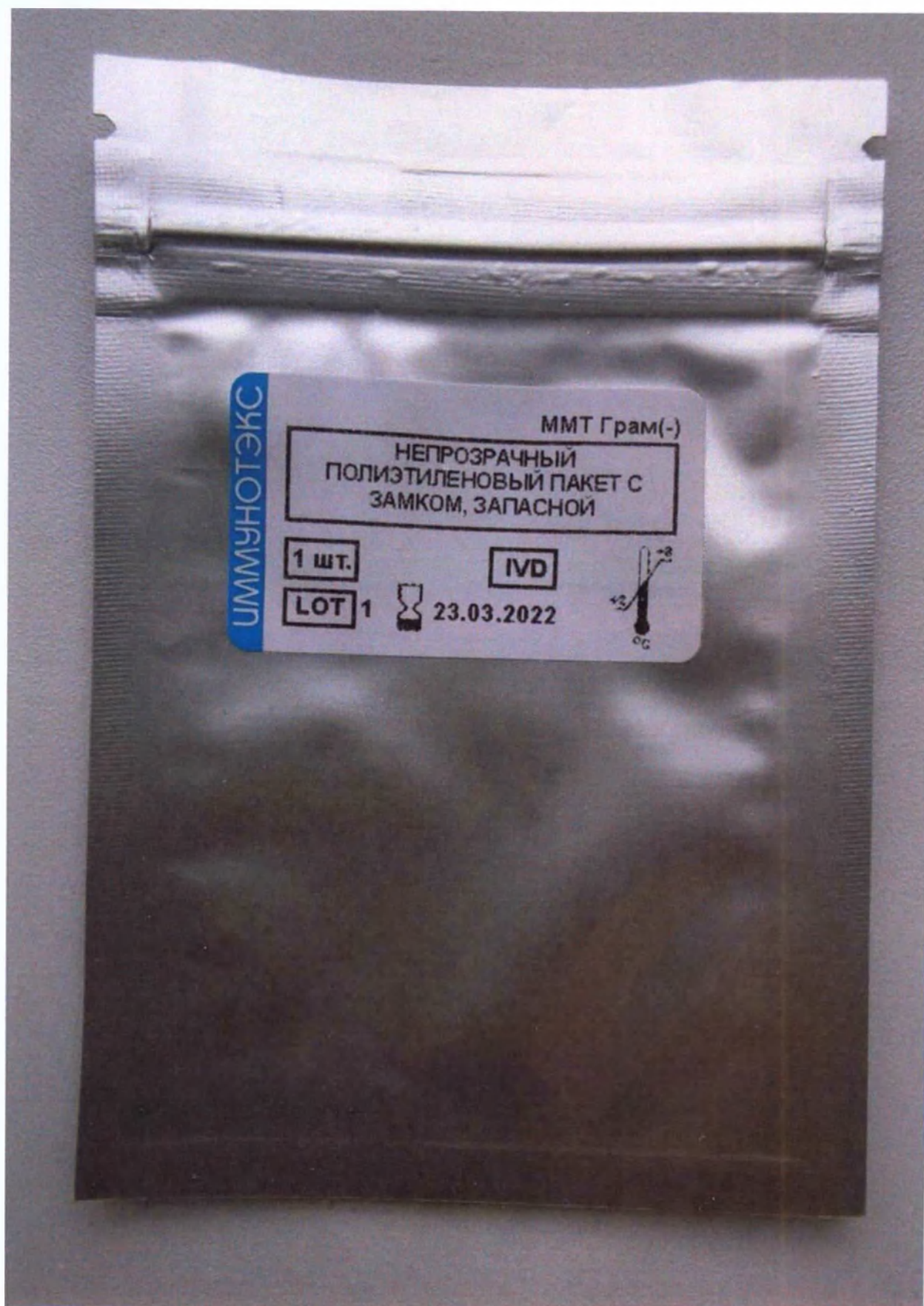

13. Таблица «Цветовой указатель» - 1 шт.

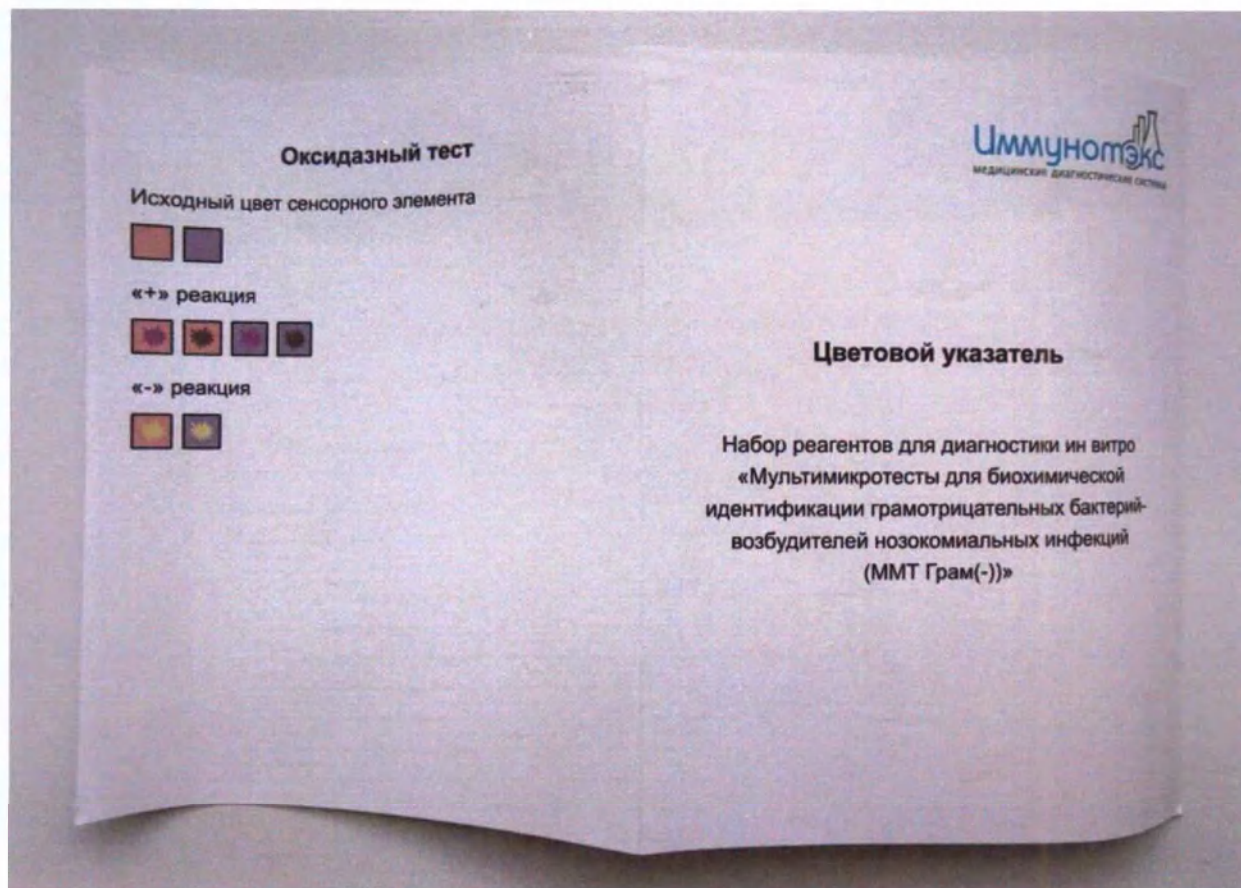

ряд 1		реакция	
A	Ф-ГЛЮ	+	Оранжевый
		-	Зеленый
B	УРЕ	+	Фиолетовый
		-	Белый
C	ЛИЗ	+	Красный
		-	Оранжевый
D	ОРН	+	Красный
		-	Оранжевый
E	АРГ	+	Красный
		-	Оранжевый
F	H ₂ S	+	Черный
		-	Белый
G	ИНД	+	Фиолетовый
		-	Белый
H	ФЕН	+	Зеленый
		-	Белый

ряд 2		реакция	
A	В-ГАЛ	+	Желтый
		-	Белый
B	ЦИТ	+	Красный
		-	Оранжевый
C	МАЛ	+	Красный
		-	Оранжевый
D	ЛАК	+	Оранжевый
		-	Зеленый
E	МАН	+	Оранжевый
		-	Зеленый
F	АРА	+	Оранжевый
		-	Зеленый
G	ГЛЮ	+	Оранжевый
		-	Зеленый
H	НИТ	+	Белый
		-	Желтый

14. Таблица «Биохимическая характеристика грамотрицательных бактерий-возбудителей НКИ» - 1 шт.

Таблица

Биохимическая характеристика грамотрицательных бактерий-возбудителей НКИ

Тесты, расположенные на двухрядных блоках

Перечень бактерий	Тесты, расположенные на двухрядных блоках																Окси-тест	
	1 ряд								2 ряд									
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H		
	Ф. Г. Ш.	УФБ	ЛЮЗ	ОРН	АУТ	НБС	ННД	ФЕН	Б-ГАЛ	ПНТ	МАЛ	ЗАМ	МАБ	АРА	СНО	ПНТ		
<i>C. amalonaticus</i>	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	в	+	+	+	+	-	
<i>C. freundii</i>	+	в	-	-	в	+	в	-	+	+	-	в	+	+	+	+	-	
<i>C. diversus (roserei)</i>	+	в	-	+	+	-	+	-	+	+	+	в	+	+	+	+	-	
<i>E. cloacae</i>	+	в	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
<i>E. coli*</i>	+	-	+	в	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	
<i>H. alvei</i>	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-	в	-	+	+	+	+	-	
<i>K. aerogenes</i>	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
<i>K. pneumoniae</i>	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
<i>K. oxytoca</i>	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	
<i>M. morganii</i>	+	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	
<i>P. agglomerans</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	+	в	+	в	+	+	+	+	-	
<i>P. vulgaris</i>	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	
<i>P. mirabilis</i>	+	+	-	+	-	+	-	+	-	в	-	-	-	-	+	+	-	
<i>P. rettgeri</i>	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	
<i>P. stuartii / P. alcalifaciens</i>	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	
<i>S. enteritidis / S. typhimurium*</i>	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	
<i>S. choleraesuis*</i>	+	-	+	+	-	в	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	
<i>S. typhi*</i>	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	
<i>S. marcescens</i>	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	-	
<i>A. baumannii / A. calcoaceticus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	
<i>A. faecalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	
<i>B. cepacia complex</i>	-	-	в	-	-	-	-	-	в	+	+	+	+	+	+	в	+	
<i>E. meningoseptica</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	
<i>F. oryzae</i>	-	в	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	
<i>P. aeruginosa</i>	-	в	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	в	+	
<i>S. maltophilia</i>	-	-	+	-	-	-	-	-	в	+	+	-	-	-	в	-	-	

* - требуется серологическое подтверждение


Изменения в номенклатуре бактерий	
Современная номенклатура	Прежнее наименование
<i>Burkholderia cepacia complex</i>	<i>Pseudomonas cepacia</i>
<i>Chryseobacterium meningosepticum</i>	<i>Chryseobacterium meningosepticum</i>
<i>Flavimonas oryzae</i>	<i>Pseudomonas oryzae</i>
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	<i>Pseudomonas maltophilia</i>

Обозначение реакций	
Положительная	+
Отрицательная	-
Чаще положительная	+
Чаще отрицательная	-
Варибельная	в



SHOT ON MI NOTE 10
AI PENTA CAMERA

15. Схема «Ключ» для ориентировочной дифференциации грамотрицательных бактерий-возбудителей НКИ - 1 шт.

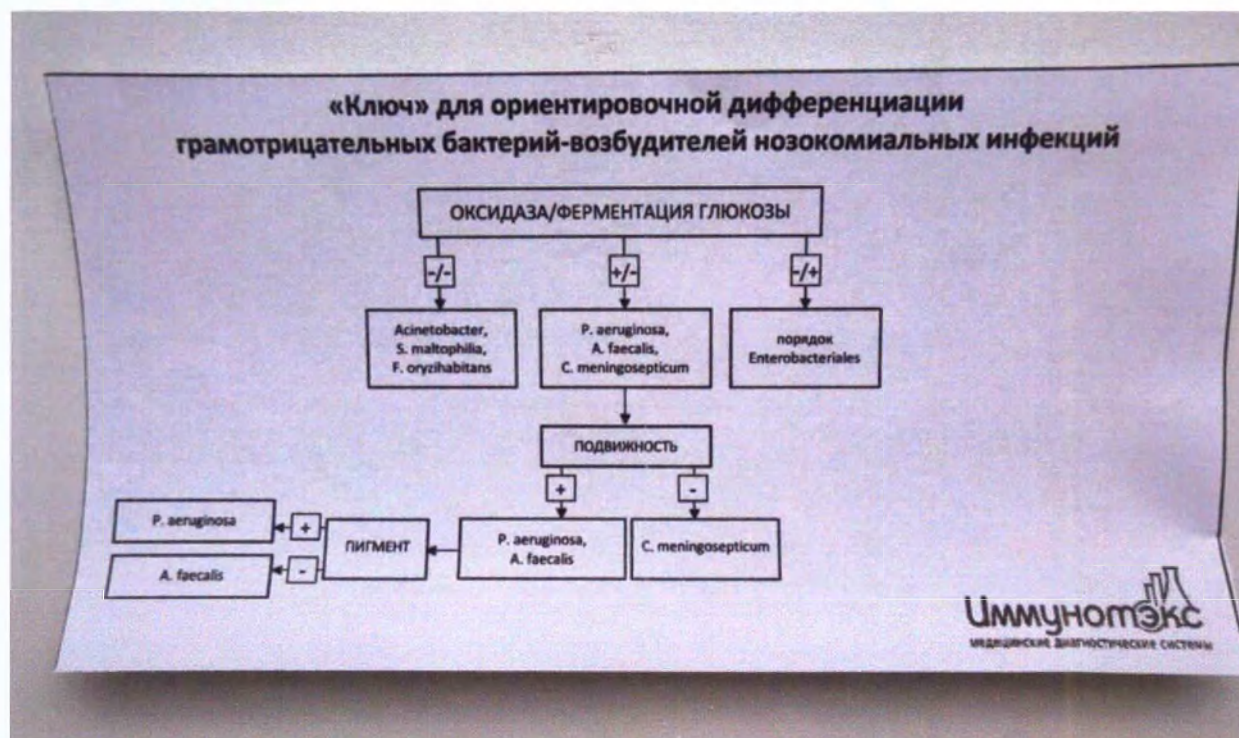

16. Кодовые карточки для набора реагентов «ММТ Грам(-)» - 18 шт.

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа: _____ от _____


Наименование отделения: _____

Врач: _____ Больной: _____


Ряд 1						Ряд 2					
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90	9/7/90
1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4

Кодовый номер: _____ Регистрационный номер: _____

17. Каталог кодов для набора реагентов «ММТ Грам (-)» - 1 шт.

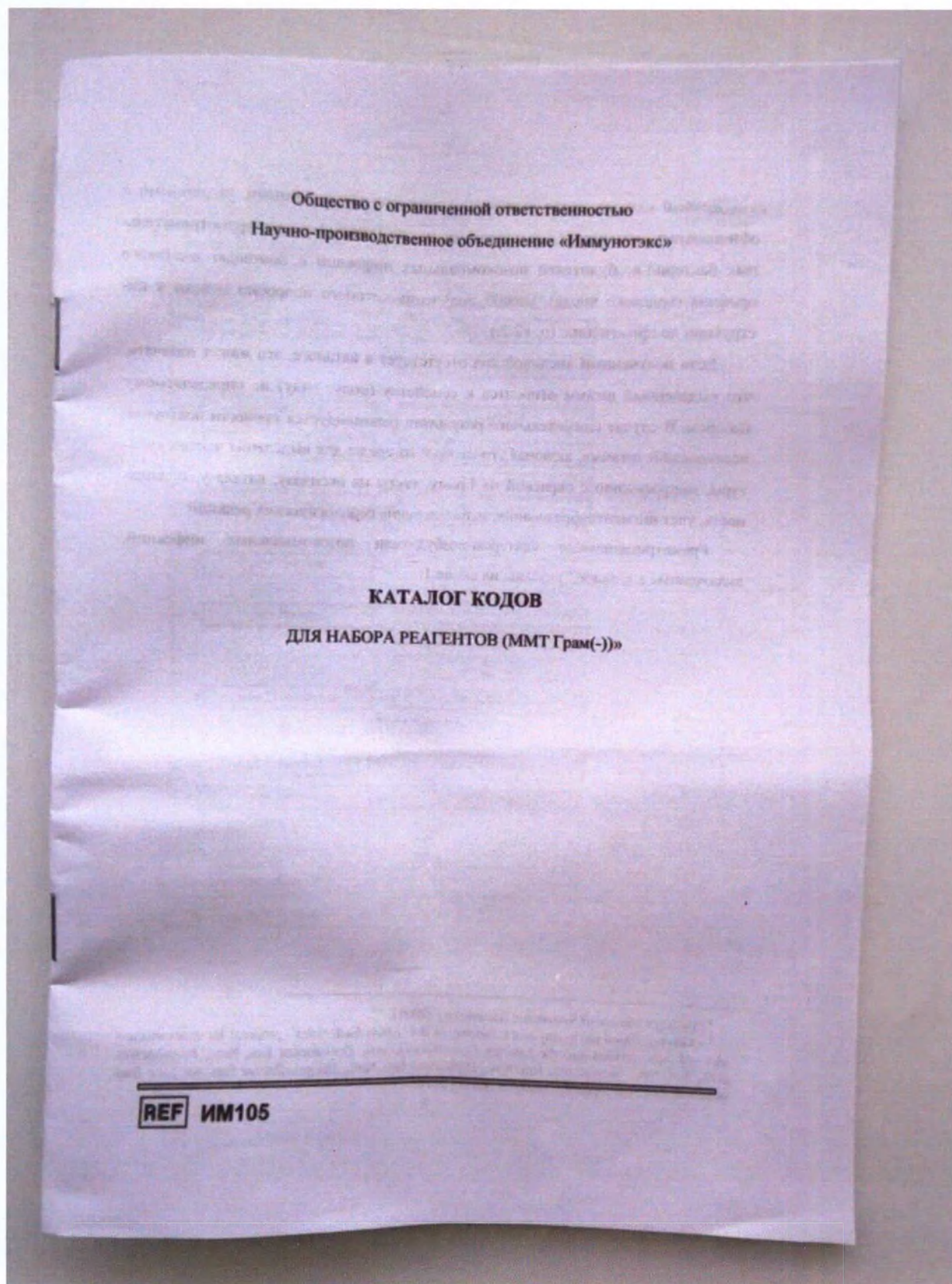

18. Инструкция по применению - 1 шт.

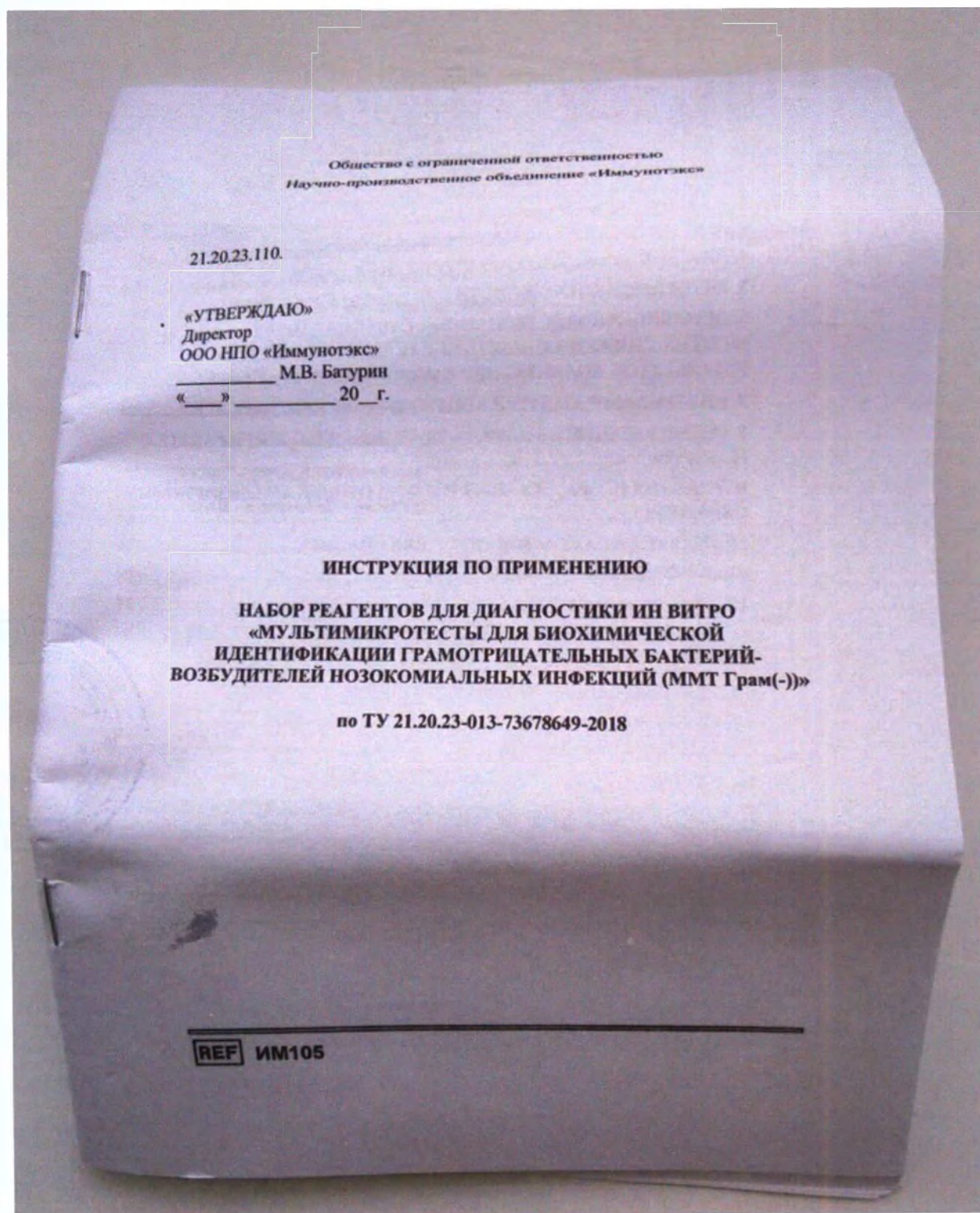





Цветовой указатель

Набор реагентов для диагностики ин витро
«Мультимикротесты для биохимической
идентификации грамотрицательных бактерий-
возбудителей нозокомиальных инфекций
(ММТ Грам(-))»

	ряд 1	реакция
A	Ф.ГЛЮ	+  - 
B	УРЕ	+  - 
C	ЛИЗ	+  - 
D	ОРН	+  - 
E	АРГ	+  - 
F	H ₂ S	+  - 
G	ИНД	+  - 
H	ФЕН	+  - 

	ряд 2	реакция
A	β-ГАЛ*	+  - 
B	ЦИТ	+  - 
C	МАЛ	+  - 
D	ЛАК	+  - 
E	МАН	+  - 
F	АРА	+  - 
G	ГЛЮ	+  - 
H	НИТ	+  - 

Оксидазный тест

Исходный цвет сенсорного элемента




«+» реакция



«-» реакция



**«Ключ» для ориентировочной дифференциации
грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций**

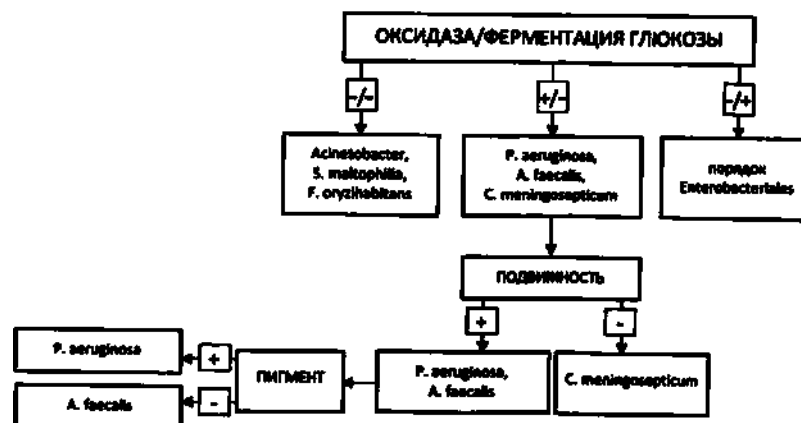

Биохимическая характеристика грамотрицательных бактерий-возбудителей НКИ

Перечень бактерий	Тесты, расположенные на двухрядных блоках.																Окси- тест
	1 ряд								2 ряд								
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Φ ГЛЮ	УРК	ЛПТ	ОРН	АРГ	НЗ	МД	ФЕН	Р-ГАЛ	ИМТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	СЛЮ	ИМТ	
C. amalonaticus	+	+))	-	+))	+))	-	+	-	+	+	-	в	+	+	+	+	-
C. freundii	+	в	-	-	в	+))	0	-	+	+))	-))	в	+	+	+	+	-
C. diversus (koseri)	+	в	-	+	+))	-	+	-	+	+	+	в	+	+	+	+	-
E. cloacae	+	в	-	+	+	-	-	-	+	+	+))	+))	+	+	+	+	-
E. coli*	+	-	+	в	-	-	+	-	+	-	-	+))	+	+	+	+	-
H. alvei	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-))	в	-	+	+	+	+	-
K. aerogenes	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
K. pneumoniae	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+))	+	+	+	+	+	+	-
K. oxytoca	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+))	+	+	+	+	+	+	-
M. morganii	+	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
P. agglomerans	+	-))	-	-	-	-	-))	-))	+	в	+))	в	+	+	+	+))	-
P. vulgaris	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-))	-	-	-	-	+	+	-
P. mirabilis	+	+	-	+	-	+	-	+	-	в	-	-	-	-	+	+	-
P. rettgeri	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+))	-	-	+	-	+	+	-
P. stuartii / P. alcalifaciens	+	-))	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-
S. enteritidis / S. typhimurium*	+	-	+	+	+))	+	-	-	-	+))	-	-	+	+	+	+	-
S. choleraesuis*	+	-	+	+	-))	в	-	-	-	-))	-	-	+	-	+	+	-
S. typhi*	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-
S. marcescens	+	-))	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	-
A. baumannii / A. calcoaceticus	-	-))	-	-	-	-	-	-	-	+	-))	+))	-	+))	+))	-	-
A. faecalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+))	-	-))	-	-	-	-	+
B. cepacia complex	-	-))	в	-))	-	-	-	-	в	+	+))	+))	+))	+))	+))	в	+))
E. meningoseptica	-	-	-	-	-	-	+))	-	+))	-))	+))	+))	+))	-	+))	-	+
F. oryzae	-	в	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-
P. aeruginosa	-	в	-	-	+))	-	-	-	-	+))	+))	-	+))	+))	+))	в	+
S. maltophilia	-	-))	+))	-	-	-	-	-	в	+	+))	-))	-	-	в	-))	-))

* - требуется серологическое подтверждение.

Изменения в номенклатуре бактерий

Современная номенклатура	Прежнее наименование
<i>Burkholderia cepacia</i> complex	<i>Pseudomonas cepacia</i>
<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>	<i>Chryseobacterium meningosepticum</i>
<i>Flavimonas oryzae</i>	<i>Pseudomonas oryzae</i>
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	<i>Pseudomonas maltophilia</i>

Обозначение реакций

Положительная	+	Отрицательная	-
Чаще положительная	+	Чаще отрицательная	-
Варибельная	в		

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа

от

Источники выделения

Наименование отделения

Врач

Фамилия, И.О.

Больной

Фамилия, И.О.

Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделом
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- внести вазелиновое масло (до инкубации)

- внести дополнительные реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа

от

Источники выделения

Наименование отделения

Врач

Фамилия, И.О.

Больной

Фамилия, И.О.

Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделом
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- внести вазелиновое масло (до инкубации)

- внести дополнительные реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа

от

Источник выделения

Наименование отделения

Врач

Фамилия, И.О.

Больной

Фамилия, И.О.

Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделено
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	Н ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

в реагенты (сразу перед учетом)

*

- ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выдается отделом
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
Сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



000 ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- внести вазелиновое масло (до инкубации)

- внести дополнительные реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Больной Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделом
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	Н ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак-ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИПМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомьтесь с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отдельно
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа

от

Источник выделения

Наименование отделения

Врач

Фамилия, И.О.

Больной

Фамилия, И.О.

Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отдельно
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

* - ознакомиться с инструкцией по применению

* - внести вазелиновое масло (для инкубации)

* - внести вазелиновое масло (для инкубации)

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделом
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИПМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источники выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделением
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Больной Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделением
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



000 ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источники выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отдельно
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	Н ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

и реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

ИммуноТэкс

Врач _____ Больной _____

Результат идентификации	
-------------------------	--

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется в отделении
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	Н ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- внести дополнительные реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отдельно
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	Н ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИПМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Окси-тест
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	
Рез-ты реак-ций + или -	Φ.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИИД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
Сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполняется отделением
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



000 ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

* - внести фекальное масло (для инкубации)

* - внести дополнительные реагенты (сразу перед учетом)

* - ознакомиться с инструкцией по применению

Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Выполнено отделение
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



Кодовая карточка для набора реагентов «ММТ Грам(-)»

Номер анализа от Источник выделения

Наименование отделения

Врач Фамилия, И.О. Больной Фамилия, И.О. Год рождения

	Ряд 1								Ряд 2								Исполняется отдельно
	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	C	D	E	F	G	H	Окси- тест
	Ф.ГЛЮ	УРЕ	ЛИЗ	ОРН	АРГ	H ₂ S	ИНД	ФЕН	β-ГАЛ	ЦИТ	МАЛ	ЛАК	МАН	АРА	ГЛЮ	НИТ	
Рез-ты реак- ций + или -																	
Числовая оценка тестов*	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
Сумма положительных результатов*																	

Кодовое число

Результат идентификации



ООО ЦИПМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ые реагенты (сразу перед учетом)

*

- ознакомиться с инструкцией по применению

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор














ООО ЦПМИ «ИммуноТэкс»

М.В. Батурин

20 18 г.

Макеты этикеток на реагенты и принадлежности (с маркировкой)

Набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))» по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018
серия 1, дата изготовления 23.03.2021 г., срок годности 23.03.2022 г.

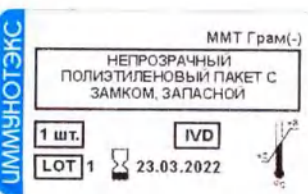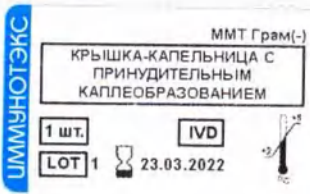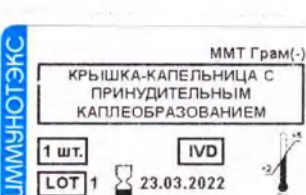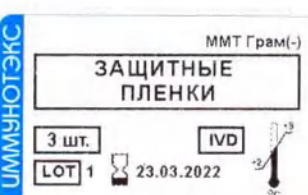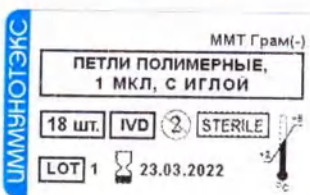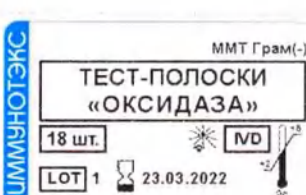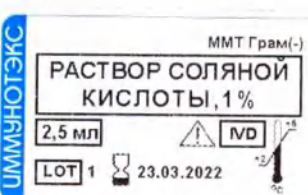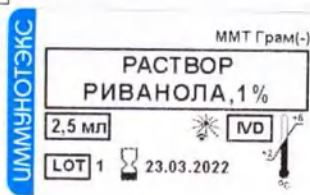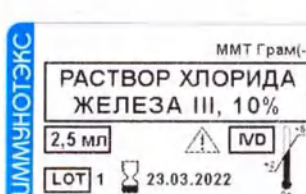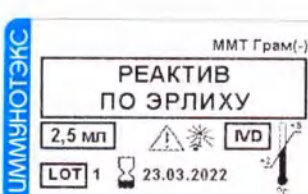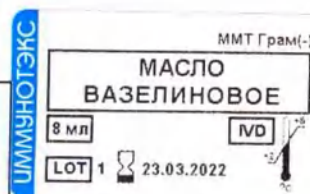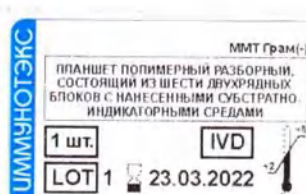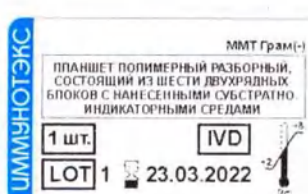

Макеты этикеток на потребительскую упаковку (с маркировкой)

Набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))» по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018
серия 1, дата изготовления 23.03.2021 г., срок годности 23.03.2022 г.

Per. №
по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018

**Набор реагентов
для диагностики ин витро
«Мультимикротесты для
биохимической идентификации
грамотрицательных бактерий-возбудителей
нозокомиальных инфекций»**

ММТ Грам(-)

LOT 1  23.03.2021  23.03.2022  18 

СОСТАВ НАБОРА:

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЪЕМ	КОЛ-ВО
Планшеты полимерные разборные, состоящие (каждый) из 6 двух-рядных блоков с нанесенными субстратно-индикаторными средами	-	3 шт.
Масло вазелиновое	8 мл	1 фл.
Реактив по Эрлиху	2,5 мл	1 фл.
Раствор хлорида железа III, 10%	2,5 мл	1 фл.
Раствор риванола, 1%	2,5 мл	1 фл.
Раствор соляной кислоты, 1%	2,5 мл	1 фл.
Тест-полоски «Оксидаза»	-	18 шт.
Петли полимерные, стерильные, 1 мкл, с иглой (ПУ №ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.)	-	18 шт.
Защитные пленки	-	3 шт.
Крышки-капельницы с принудительным каплеобразованием	-	2 шт.
Непрозрачный полиэтиленовый пакет с замком, запасной	-	1 шт.
Таблица «Цветовой указатель»	-	1 шт.
Таблица «Биохимическая характеристика грамотрицательных бактерий-возбудителей НК/»	-	1 шт.
Схема «Ключ» для ориентировочной дифференциации грамотрицательных бактерий-возбудителей НК/	-	1 шт.
Кодовые карточки	-	18 шт.
Каталог кодов	-	1 шт.
Инструкция по применению	-	1 шт.

для профессионального использования.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО ЦПМИ «ИММУНОТЭК»

М.В. Батурин


«20» 2021 г.



Макет потребительской упаковки (с маркировкой)

Внешний вид


Набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))» по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018

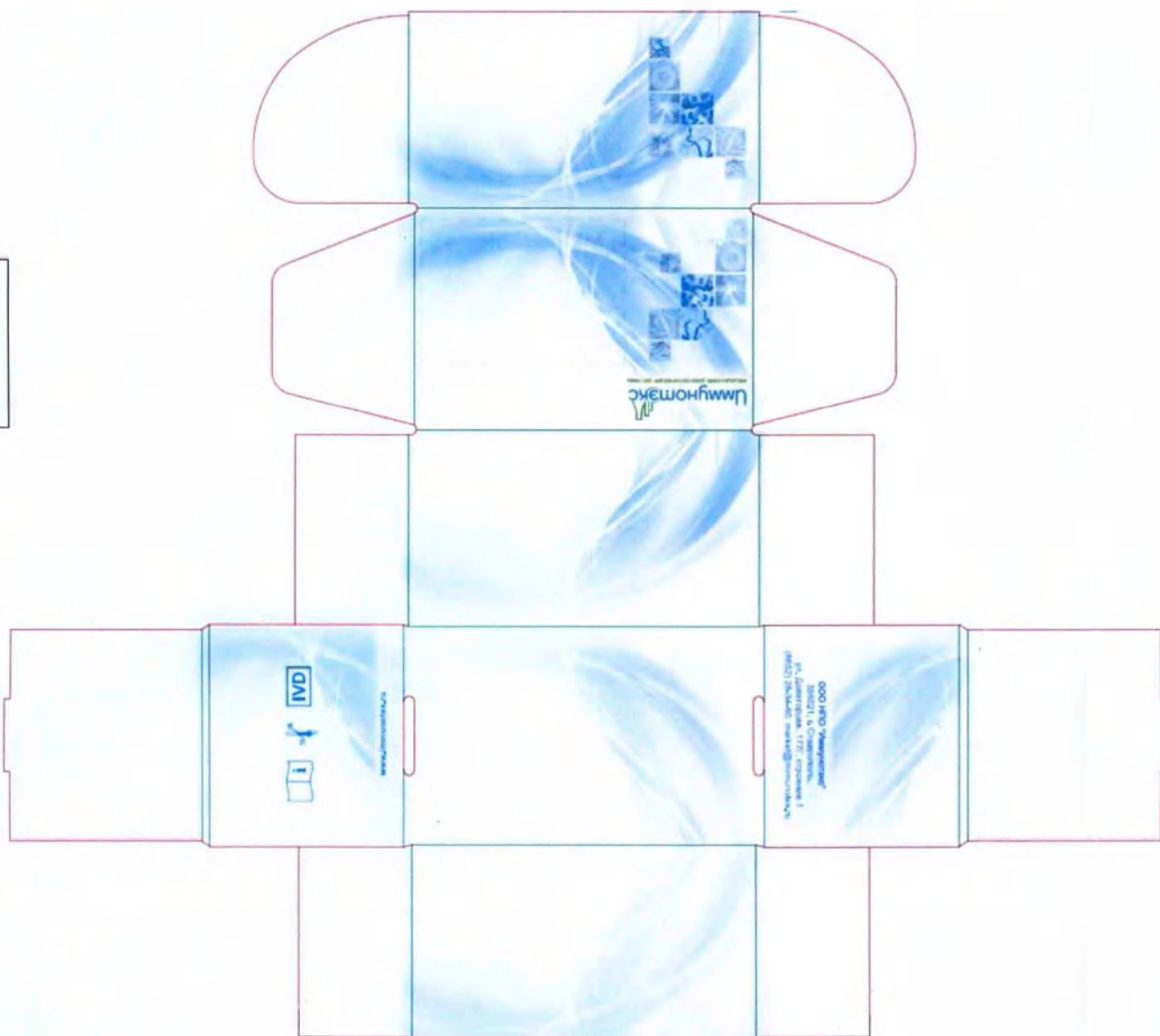

Макет потребительской упаковки (с маркировкой)

Размеры

Набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))» по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018

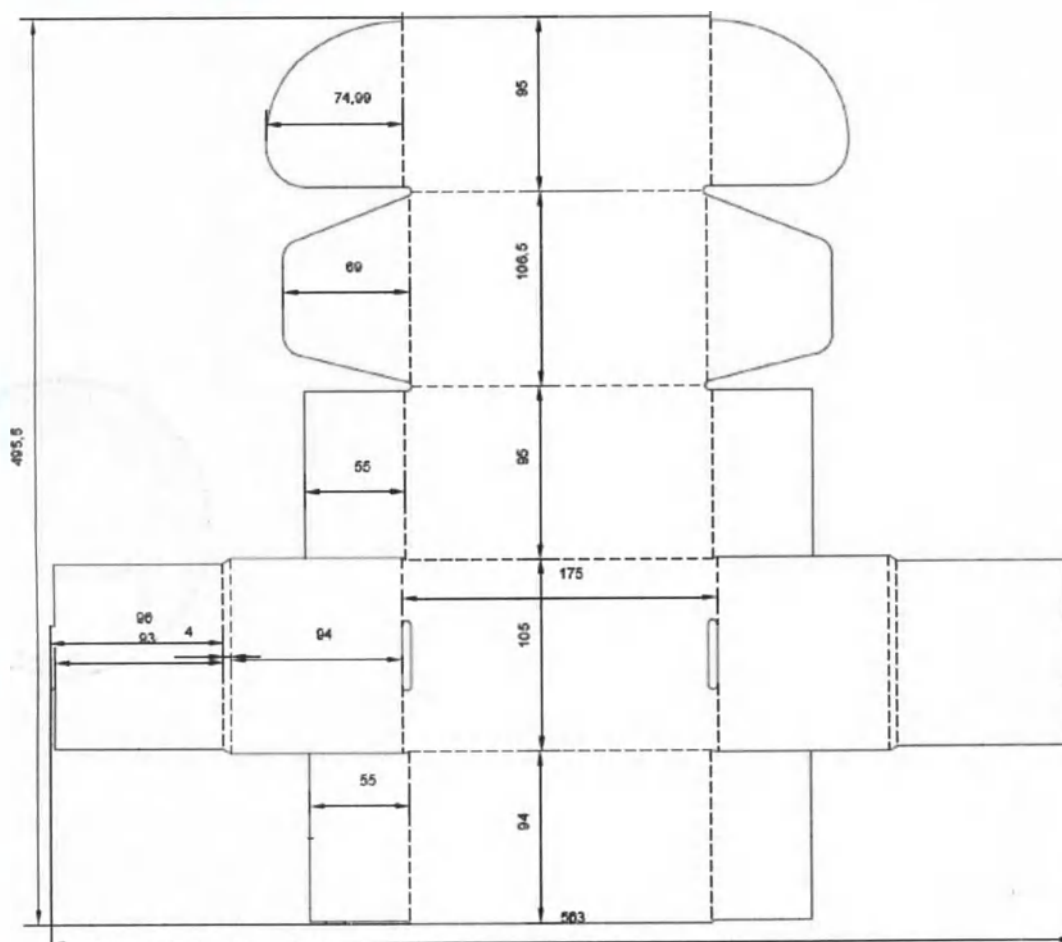[illegible]



Макет этикетки на групповую упаковку (с маркировкой)

Набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))» по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018
 серия 1, дата изготовления 23.03.2021 г., срок годности 23.03.2022 г.

Набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))»	
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ	ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ (предприятие-изготовитель)
Наименование организации: Адрес организации: Контактное лицо: Телефон:	ООО НПО «Иммунотэкс» Россия, 355021, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 177Г, стр. 1, (8652)28-34-60
LOT 1 23.03.2021 23.03.2022	
Хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 2-8 °С, относительной влажности 40-80%. Допускается хранение при температуре не выше 25 °С не более 5 суток. Не замораживать! Транспортировать всеми видами крытых транспортных средств при температуре 2-8 °С, относительной влажности 40-80%. Допускается транспортирование при температуре не выше 25 °С не более 5 суток.	
Количество наборов: 1	
Масса НЕТТО: 0,495 кг	Масса БРУТТО: 1,190 кг



Макет групповой упаковки (с маркировкой)

Набор реагентов для диагностики ин витро «Мультимикротесты для биохимической идентификации грамотрицательных бактерий-возбудителей нозокомиальных инфекций (ММТ Грам(-))» по ТУ 21.20.23-013-73678649-2018

