

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
(УДОСТОВЕРЕНИЕ) ПОДПИСИ
личности от имени корпорации**

ת"ד 970/21

**אימות חתימתו
של אדם
בשם תאגיד**

Я, нижеподписавшаяся, Зингерман
Орли, нотариус, номер лицензии
299856, адрес ул. Жаботинского, 35, г.
Рамат Ган, Израиль, настоящим
документом подтверждаю, что
20.09.2021, в моем присутствии
находилась госпожа Чертков
Светлана, личность которой
установлена мной в соответствии с
предъявленным мне паспортом
государства Израиль № 21807002
Выданным 11.09 2014 года в городе
Кфар Саба, в Израиле.

Я убедилась, что госпожа Чертков
Светлана, поняла смысл данного
документа и подписала его по
собственному желанию,
обозначенный буквой «А» от имени
корпорации MEDEREN NEOTECH LTD
No. 515505329, находящейся в Тель-
Авиве, Израиль.

Как подтверждение сказанному выше,
госпожа Чертков Светлана подписала
приложенный документ,
обозначенный буквой «А» выданный
от имени корпорации.

В подтверждение этого я,
удостоверившись в подписи госпожи
Чертков Светлана своей личной
подписью.
Дата 20.09.2021

Печать и подпись нотариуса

20.09.2021



ושוכנעתי כי הניצב/ת/ים בפני הבינ/ה/ו הבנה
מלאה את משמעות הפעולה
וחתם/מה/ו מרצונם/ם החופשי על המסמך
המצורף בזה ומסון באות "א", בשם חברה
מדרו נאוטע "מ"
שמספרה 515505329

שמיקומה: תל אביב, ישראל

בתולף תפקידו/ה/ם וסמכותו/ה/ם וסמכותו/ה/ם
כמורשה/ת/
חתימה מטעם ובשם החברה, אני מאשר

כראיה להנחת, להנחת דעתי, לשם הוכחת
רשותו/ה/ם של מל (מר/ת) צירטקוב סבטלנה
לחתום על המסמך הרצ"ב והמסומן באות "א"
תשם החברה הנייל
ולאיה נני מאמת את חתימתו/ה/ם של
החותם/ים הנ"ל

היום 20.09.2021

שכ"ט נוסטריוני 322+מע"מ



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

УТВЕРЖДАЮ

Mederen Neotech Ltd.
Генеральный директор
Светлана Чертков
~~Mederen Neotech Ltd.~~
515505329

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Набор для инфузионной терапии MEDEREN

Версия 3



Оглавление

1 Наименование медицинского изделия.....	3
2 Сведения о производителе медицинского изделия.	36
3 Сведения о месте производства медицинского изделия.....	36
4 Сведения об уполномоченном представителе производителя на территории РФ.....	37
5 Назначение и принцип действия медицинского изделия, установленные производителем.	37
6 Классификация.....	37
7 Техническое описание, параметры и характеристики медицинского изделия.....	37
8 Комплектность.	52
9 Упаковка.	53
10 Маркировка.....	53
11 Указания по применению.....	54
12 Сведения о техническом обслуживании, текущий ремонт.....	58
13 Условия эксплуатации.....	58
14 Транспортирование.....	59
15 Хранение.....	59
16 Гарантийные обязательства.	59
17 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия.	61
17 Контактная информация.	61

1 Наименование медицинского изделия.

Наименование медицинского изделия – Набор для инфузионной терапии MEDEREN, в вариантах исполнения (далее по тексту – изделие).

1. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-01, в комплектации:
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
2. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-02, в комплектации:
 - Кран инфузионный трехходовой красный в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
3. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-03, в комплектации:
 - Кран инфузионный трехходовой белый в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
4. Набор для инфузионной терапии REF 1416-ML100-04, в комплектации:
 - Кран инфузионный трехходовой синий липидорезистентный в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
5. Набор для инфузионной терапии REF 1416-ML100-05, в комплектации:
 - Кран инфузионный трехходовой красный липидорезистентный в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
6. Набор для инфузионной терапии REF 1416-ML100-06, в комплектации:
- Кран инфузионный трехходовой белый липидорезистентный в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
7. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-10, в комплектации:
- Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией 10 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачной в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
8. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-30, в комплектации:
- Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией 30 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачной в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
9. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-50, в комплектации:
- Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией 50 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачной в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
10. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-80, в комплектации:
- Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией 80 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачной в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
11. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-100, в комплектации:
- Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией 100 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачной в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
12. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-150, в комплектации:
- Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией 150 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачной в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
13. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-10, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
14. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-30, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
15. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-50, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
16. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-80, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
17. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-100, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
18. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-150, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
19. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-200, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
20. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-250, в комплектации:

- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 250 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
21. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-300, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 300 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
22. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-10, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
23. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-30, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
24. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-50, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 50 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
25. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-80, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
26. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-100, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
27. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-150, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
28. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-200, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
29. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-250, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 250 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
30. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-300, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 300 см, Ø 3.0*4.1 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
31. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-10, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
32. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-30, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
33. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-50, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
34. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-80, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
35. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-100, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
36. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-150, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
37. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-200, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
38. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-250, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 250 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
39. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-300, в комплектации:

- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 300 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
40. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-10, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
41. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-30, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
42. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-50, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
43. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-80, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
- 44. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-100, в комплектации:
 - Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
- 45. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-150, в комплектации:
 - Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
- 46. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-200, в комплектации:
 - Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
- 47. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-250, в комплектации:
 - Линия инфузионная удлинительная светозащитная 250 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
- 48. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-300, в комплектации:
 - Линия инфузионная удлинительная светозащитная 300 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальных упаковках 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка 1 шт.
49. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M500-30, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с регулятором потока и У-портом 30 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
50. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M500-50, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с регулятором потока и У-портом 50 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
51. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M500-80, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с регулятором потока и У-портом 80 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
52. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M500-100, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с регулятором потока и У-портом 100 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
53. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M500-150, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с регулятором потока и У-портом 150 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
54. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M600T-10, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с Т-портом 10 см в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
55. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M701-10, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с безыгольным коннектором 10 см в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
56. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M702-10, в комплектации:
- Линия удлинительная с 2-мя безыгольными коннекторами 10 см в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка 1 шт.
57. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M703-10, в комплектации:
- Линия удлинительная с 3-мя безыгольными коннекторами 10 см в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
58. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-10F1.2, в комплектации:

- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
59. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-30F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
60. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-50F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
61. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-80F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
62. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-100F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
63. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-150F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
64. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-200F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
65. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-10F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
66. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-30F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
67. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-50F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
68. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-80F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
69. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-100F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
70. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-150F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
71. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-200F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
72. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-300F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 300 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
73. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-10F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
74. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-30F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
75. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-50F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
76. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-80F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
77. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-100F5.0, в комплектации:

- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
78. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-150F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
79. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300-200F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
80. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-10F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
81. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-30F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
82. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-50F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 50 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
83. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-80F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
84. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-100F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
85. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-150F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
86. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-200F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
87. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-10F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
88. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-30F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
89. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-50F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 50 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
90. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-80F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
91. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-100F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
92. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-150F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
93. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-200F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
94. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-300F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 300 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
95. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-10F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см. Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
96. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-30F5.0, в комплектации:

- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см. Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
97. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-50F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm 50 см в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
98. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-80F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
99. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-100F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
100. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-150F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
101. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M300LP-200F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
102. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-10F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
103. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-30F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
104. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-50F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
105. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-80F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
106. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-100F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
107. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-150F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
108. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-200F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
109. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-10F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
110. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-30F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
111. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-50F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
112. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-80F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
113. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-100F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
114. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-150F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
115. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-200F0.2, в комплектации:

- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
116. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-300F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 300 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
117. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-10F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
118. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-30F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
119. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-50F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
120. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-80F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
121. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-100F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
122. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-150F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
123. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400-200F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
124. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-10F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
125. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-30F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
126. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-50F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
127. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-80F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
128. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-100F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
129. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-150F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
130. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-200F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
131. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-300F1.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 300 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
132. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-10F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
133. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-30F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
134. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-50F0.2, в комплектации:

- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
135. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-80F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
136. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-100F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
137. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-150F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
138. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-200F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.

- Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
139. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-300F0.2, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 300 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
140. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-10F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 10 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
141. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-30F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 30 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
142. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-50F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 50 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
143. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-80F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 80 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
144. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-100F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 100 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
145. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-150F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
146. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-200F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 200 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
147. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M400LP-300F5.0, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная светозащитная 300 см, Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
148. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M700C-150, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная высокого давления спиральная 150 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.

- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
149. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-11, в комплектации:
- Фильтр-канюля аспирационная с воздушным фильтром зеленая в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
150. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-12, в комплектации:
- Фильтр-канюля аспирационная с воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки синяя в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
151. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-13, в комплектации:
- Фильтр-канюля аспирационная с воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки красная в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
152. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-14, в комплектации:
- Фильтр-канюля аспирационная с безыгольным коннектором в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка 1 шт.
153. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M100-07, в комплектации:

- Блок из 3-х кранов в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
154. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-01, в комплектации:
- Заглушка инфузионная Луер-Лок красная в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
155. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-02, в комплектации:
- Заглушка инфузионная Луер-Лок синяя в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия удлинительная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
156. Набор для инфузионной терапии REF 1416-ML702-10, в комплектации:
- Линия инфузионная удлинительная с 2-мя Луер-Лок коннекторами 10 см в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
157. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-03, в комплектации:
- Заглушка инфузионная с мембраной желтая в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия удлинительная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
158. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M200-04, в комплектации:
- Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)

- Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
159. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M800-01, в комплектации:
- Коннектор безыгольный в индивидуальных упаковках - 100 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.
160. Набор для инфузионной терапии REF 1416-M800-02, в комплектации:
- Коннектор безыгольный с прямопоточным клапаном в индивидуальных упаковках - 50 шт.
 - Заглушка инфузионная с мембраной прозрачная в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Кран инфузионный трехходовой синий в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Линия инфузионная удлинительная прозрачная 150 см, Ø 1.0*2.3 мм в индивидуальной упаковке - 1 шт. (при необходимости)
 - Инструкция по применению - 1 шт.
 - Внешняя потребительская упаковка - 1 шт.

2 Сведения о производителе медицинского изделия.

Mederen Neotech Ltd. (Медерен Неотех Лимитед),
Address: Harakevet St. 58, Tel-Aviv-Jaffa, Israel, postal code: 6777016,
Tel.: 515505329, e-mail: info@mederen.com, www.mederen.com
(Медерен Неотех Лтд.
ул. Харакевет, 58, Тель-Авив-Яффа, 6777016, Израиль,
Тел.: 515505329, e-mail: info@mederen.com, www.mederen.com).

3 Сведения о месте производства медицинского изделия.

Завод-изготовитель № 1: Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd.
Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang 315105, China.
(Нинбо Грейткэа Трейдинг Ко. Лтд.,
Блок 93, Здание 12, № 818, Цимин Роуд, Иньчжоу, Нинбо, Чжэцзян 315105, Китай).

Завод-изготовитель № 2: Shandong Lee Med Technology Co., Ltd No.10, Sanying Road
Technology Industrial Park Zhangolian District Zibo 255000 Shandong, China
(Шаньдун Ли Мед Технолоджи Лтд. Ко., №10, Саньянг Рэд Технолоджи Индустриал Парк
Цянголиан Дистрикт Зибо 255000 Шаньдун, Китай).

4 Сведения об уполномоченном представителе производителя на территории РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАМЕДЭКС» (ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»), Адрес: Россия, 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 113, корпус ЛИТЕР А, офис 2, Тел.: +7 (812)-324-41-00, E-mail: info@alfamedex.ru, Сайт: <http://alfamedex.ru>.

5 Назначение и принцип действия медицинского изделия, установленные производителем.

Изделие предназначено для проведения инфузионной терапии, а именно:

- удлинения инфузионной магистрали, в тех случаях, когда стандартной длины магистрали недостаточно;
- соединения нескольких инфузионных и трансфузионных систем (линий) и регулирования потоков внутривенного раствора;
- предотвращения утечки содержимого системы;
- безопасного забора жидкости из флаконов.

Изделие стерильное, однократного применения и предназначено для временного использования в течение не более 96 часов.

Инфузионные наборы обеспечивают безопасное использование любого сосудистого доступа (центрального венозного, периферического венозного, артериального, внутрикостного). Набор включает (по необходимости) изделия, применяемые на каждом из этапов эксплуатации сосудистого катетера.

Принцип действия: обеспечение подачи инфузионного раствора из стеклянных и полимерных резервуаров с помощью дозатора к средствам сосудистого доступа, обеспечение подачи инфузионного раствора из нескольких стеклянных или полимерных резервуаров с помощью дозатора к одному сосудистому доступу, механическое перекрытие катетеров с целью блокировки истечения крови при возможности введения лекарственных средств в сосудистое русло или активной аспирации проб крови. Потенциальные потребители – медицинские учреждения, осуществляющие процедуры инфузионной терапии врачом-специалистом.

Условия применения – клиники, больницы, в службе скорой помощи, в полевых условиях, в учреждениях службы крови.

6 Классификация.

В соответствии с Приложением IX Директивы Совета Европейского экономического сообщества 93/42/ЕЕС, изделию присвоен класс безопасности 2а.

Изделие является неинвазивным устройством и предназначено для краткосрочного применения не более 96 часов.

7 Техническое описание, параметры и характеристики медицинского изделия.

– Изделия, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны и биологически безопасны в течение 3 или 5 лет со даты стерилизации (см. таблицу 2). Не имеют механических повреждений и посторонних включений, влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность изделий гладкая, без заусенцев, трещин и сколов.

Изделие не имеет перегибов и слипшихся участков трубок линии инфузионной удлинительной, которые могут препятствовать нормальному току жидкости.

Изделия не содержат натуральный латекс и фталаты.

7.1. Кран инфузионный трехходовой.

Кран инфузионный трехходовой (далее по тексту – кран), представлен в следующих вариантах исполнения:

- Кран инфузионный трехходовой синий;
- Кран инфузионный трехходовой белый;
- Кран инфузионный трехходовой красный;
- Кран инфузионный трехходовой синий липидорезистентный;
- Кран инфузионный трехходовой красный липидорезистентный;
- Кран инфузионный трехходовой белый липидорезистентный;
- Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией 10, 30, 50, 80, 100 или 150 см;
- Блок из трех кранов инфузионных.

Кран инфузионный трехходовой - устройство, подключаемое между инфузионной линией и устройством венепункции, для управления потоком вливаемой жидкости из одного или двух разных источников одновременно в сердечно – сосудистую систему. Кран используется для соединения нескольких инфузионных и трансфузионных систем и регулирования потоков внутривенного раствора. Так же используется в инфузионной терапии при инвазивном мониторинге кровяного давления.

Внешний вид кранов представлен на рисунках 1-3.

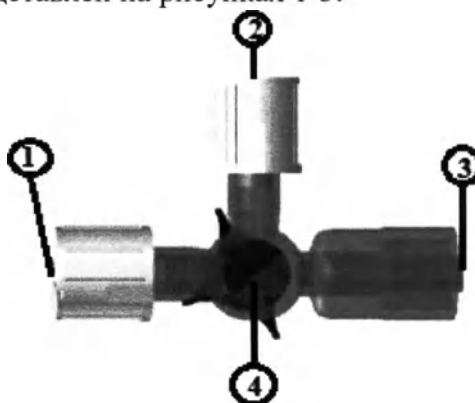


Рисунок 1 – Схематическое изображение крана инфузионного трехходового синего.

- 1, 2 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female), с предохранительным колпачком;
 3- коннектор Луер-Лок типа «папа» (male), с предохранительным колпачком;
 4 – поворотное устройство.

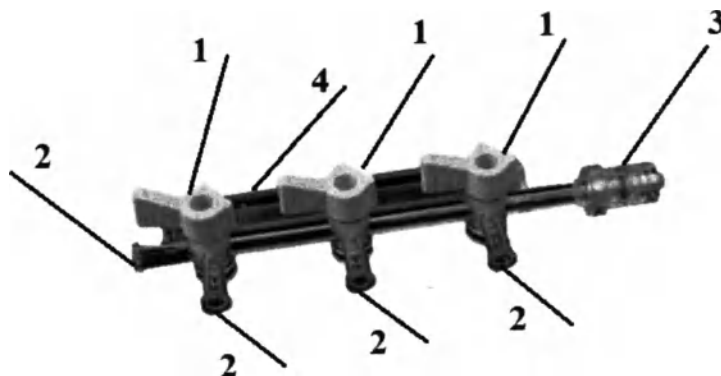


Рисунок 2 – Схематическое изображение блока из трех кранов инфузионных.

- 1 – поворотное устройство;
- 2 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female);
- 3 – коннектор Луер-Лок типа «папа» (male);
- 4 – бортик.

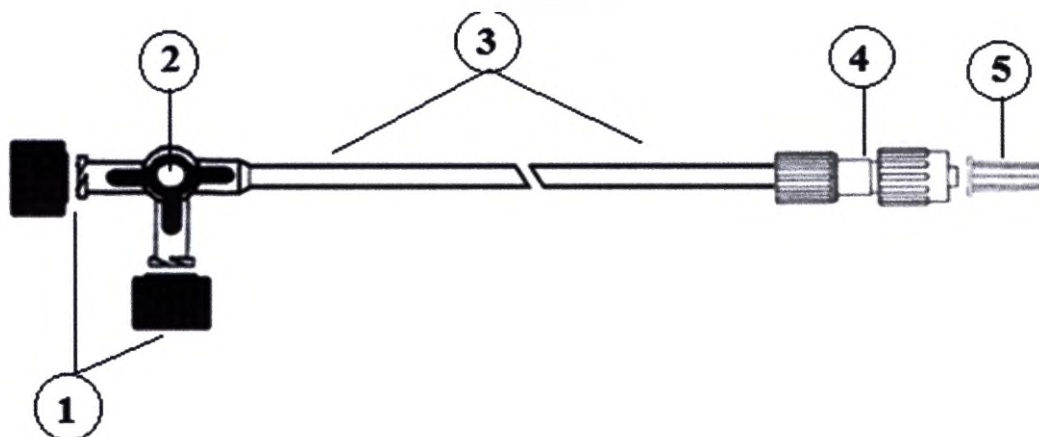


Рисунок 3 – Схематическое изображение крана инфузионного трехходового синего с удлинительной линией.

- 1 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female);
- 2 – поворотное устройство
- 3 – линия удлинительная;
- 4 – коннектор Луер-Лок типа «папа» (male);
- 5 – предохранительный колпачок.

– Кран имеет поворотное устройство для регулировки тока жидкости. В зависимости от варианта исполнения поворотное устройство может быть красного, белого или синего цвета. Кран с синим поворотным устройством используется для подключения к венозному кровотоку, с красным – для подключения к артериальному кровотоку, а кран с белым поворотным устройством является универсальным. На поворотное устройство нанесена стрелка, указывающая направление тока жидкости.

Кран имеет три коннектора: два коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) и один коннектор Луер-Лок типа «папа» (male). На концах коннекторов расположены предохранительные колпачки. Изделие с помощью коннектора Луер-Лок типа «папа» (male)

присоединяется к устройству венепункции и служит переходником для присоединения инфузионной линии или шприца.

Кран инфузионный трехходовой липидорезистентный изготавливается из липидорезистентного поликарбоната, что обеспечивает устойчивость к действию жировых эмульсий и позволяет использовать изделие для введения высокомолекулярных растворов и жировых эмульсий.

Кран инфузионный трехходовой синий с удлинительной линией отличается наличием инфузионной линии между корпусом крана и Луер-Лок коннектором типа «папа» (male), предназначенной для удлинения инфузионной магистрали, в тех случаях, когда стандартной длины магистрали недостаточно.

Технические параметры и характеристики крана трехходового:

1. Габаритные размеры (длина×ширина) – 42,0×22,6 мм.
2. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 8,0 мм.
3. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 4,0 мм.
4. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 10,0 мм.
5. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 7,0 мм.
6. Подвижность поворотного устройства – 180°.

Материалы изготовления полиэтилен и поликарбонат.

Технические параметры и характеристики блока из трех кранов:

1. Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – 140,0×35,0×25,0 мм.
2. Внешний диаметр трубки – 6,0 мм.
3. Внутренний диаметр трубки – 4,0 мм.
4. Длина трубки – 140,0 мм.
5. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 11,0 мм.
6. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 2,2 мм.
7. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 8,1 мм.
8. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 4,1 мм.
9. Подвижность поворотного устройства – 180°.

Материалы изготовления поликарбонат и полиформальдегид.

Технические параметры и характеристики крана инфузионного, трехходового с удлинительной линией:

1. Габаритные размеры (длина×ширина) – 42,1×26,6 мм.
2. Внешний диаметр удлинительной линии – 4,1 мм.
3. Внутренний диаметр удлинительной линии – 3,0 мм.
4. Длина удлинительной линии – 100, 300, 500, 800, 1000 и 1500 мм.
5. Объем заполнения удлинительной линии – 0,6; 1,8; 3,0; 4,8; 6,0 и 9,0 мл соответственно длине удлинительной линии.
6. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 8,0 мм.
7. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 4,0 мм.
8. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 10,0 мм.
9. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 7,0 мм.
10. Подвижность поворотного устройства – 180°.
11. Скорость потока – не менее 15 мл/мин.

Материалы изготовления полиэтилен, поливинилхлорид и поликарбонат.

7.2 Линия инфузионная удлинительная.

Линия инфузионная удлинительная (далее по тексту – линия удлинительная), в зависимости от варианта исполнения, может быть:

- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250 или 300 см;
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250 или 300 см;
- Линия инфузионная удлинительная с регулятором потока и У-портом, длиной 10, 30, 50, 80, 100 или 150 см;
- Линия инфузионная удлинительная с Т-портом 10 см;
- Линия инфузионная удлинительная с 1-им или 2-мя, или 3-мя безыгольными коннекторами, длиной 10 см;
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150 или 200 см;
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см;
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150 или 200 см;
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см;
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см;
- Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см;
- Линия инфузионная удлинительная с двумя Луер-Лок коннекторами, длиной 10 см;
- Линия инфузионная удлинительная высокого давления спиральная 150 см.

Внешний вид линии удлинительной представлен на рисунках 4-10.

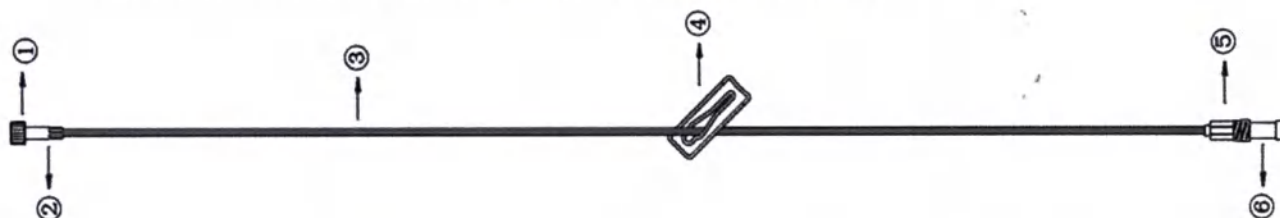


Рисунок 4 – Схематическое изображение линии инфузионной удлинительной светозащитной.

- 1, 6 – предохранительный колпачок;
- 2 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female);
- 3 – трубка линии удлинительной;
- 4 – зажим;
- 5 – коннектор Луер-Лок типа «папа» (male).



Рисунок 5 – Схематическое изображение линии инфузионной удлинительной светозащитной с фильтром.

- 1, 6 – предохранительный колпачок;
- 2 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female);
- 3 – трубка линии удлинительной;
- 4 – фильтр;
- 5 – коннектор Луер-Лок типа «папа» (male).

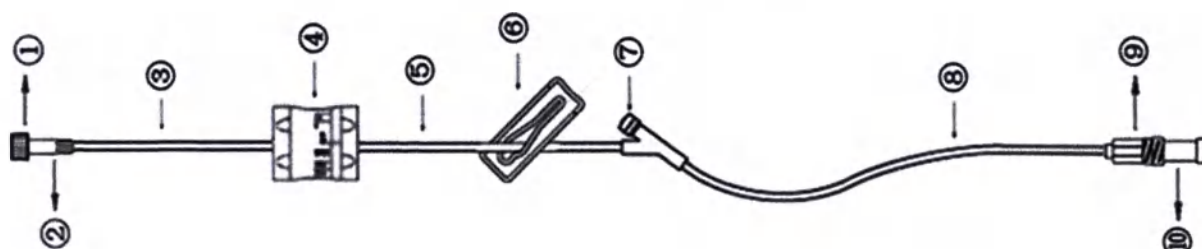


Рисунок 6 – Схематическое изображение инфузионной удлинительной прозрачной с регулятором потока и У-портом.

- 1, 10 – предохранительный колпачок;
- 2 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female);
- 3, 5, 8 – трубка линии удлинительной;
- 4 – регулятор потока;
- 6 – зажим;
- 7 – У-образный инъекционный порт;
- 9 – коннектор Луер-Лок типа «папа» (male).

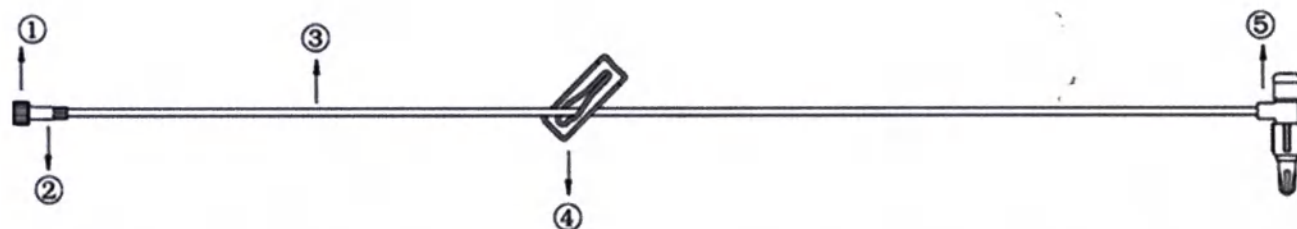


Рисунок 7 – Схематическое изображение линии инфузионной удлинительной прозрачной с Т-портом.

- 1 – предохранительный колпачок;
- 2 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female);
- 3 – трубка линии удлинительной;
- 4 – зажим;
- 5 – Т-образный инъекционный порт.

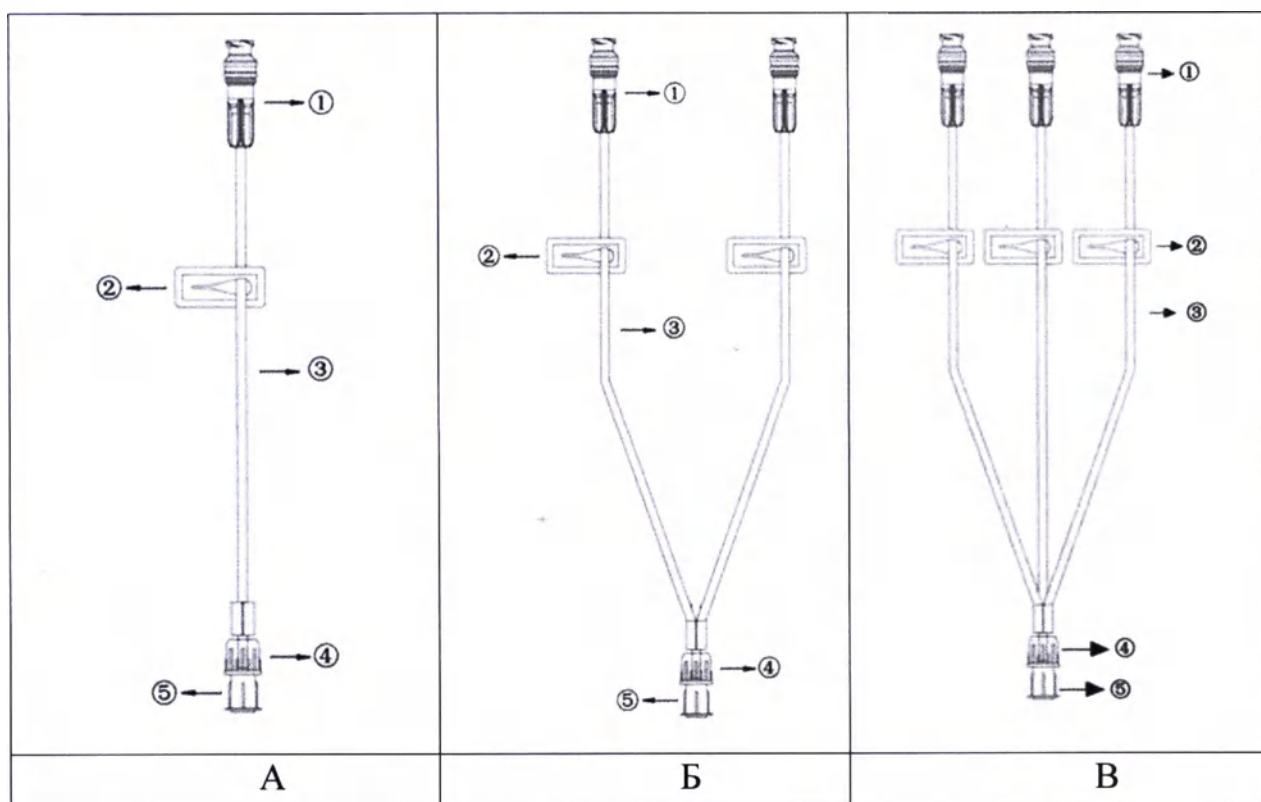


Рисунок 8 – Схематическое изображение линии инфузионной удлинительной прозрачной с безыгольным коннектором

- А) – Линия инфузионная удлинительная с 1-им безыгольным коннектором;
Б) Линия инфузионная удлинительная с 2-мя безыгольными коннекторами;
В) – Линия инфузионная удлинительная с 3-мя безыгольными коннекторами;

1 –безыгольный коннектор;

2 – зажим;

3 – трубка линии удлинительной;

4 – коннектор Луер-Лок типа «папа» (male);

5 – предохранительный колпачок.



Рисунок 9 – Схематическое изображение линии инфузионной удлинительной с двумя Луер-Лок коннекторами, длиной 10 см.

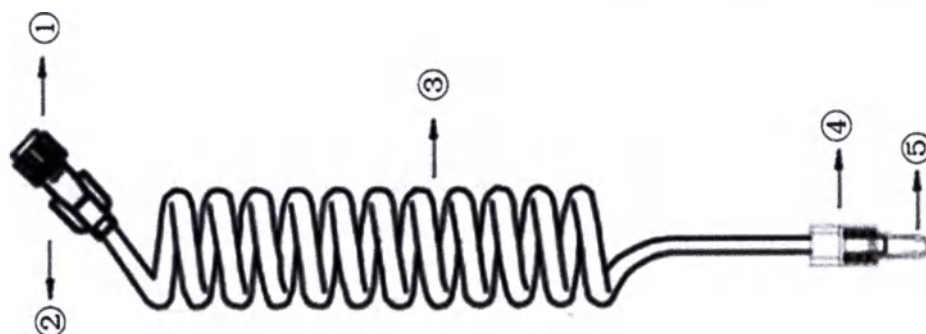


Рисунок 8 – Схематическое изображение линии инфузионной удлинительной прозрачной с безыгольным коннектором.

- 1,5 – предохранительный колпачок;
- 2 – коннектор Луер-Лок типа «папа» (male);
- 3 – спиральная трубка линии удлинительной;
- 4 – коннектор Луер-Лок типа «мама» (female).

Линия удлинительная представляет собой гибкую полимерную трубку с заданной длиной и диаметром, соединенную с двумя коннекторами Луер-Лок: один коннектор типа «папа» (male), второй коннектор типа «мама» (female).

Коннектор Луер-Лок типа «мама» (female) имеет маленькие пластиковые крылышки для удобства поворота коннектора и создания закрытой системы или герметичного затвора при остановке инфузии благодаря Луер-Лок заглушке. На противоположном конце линии удлинительной находится коннектор Луер-Лок типа «папа» (male). Коннекторы Луер-Лок совместимы со шприцами, кранами инфузионными, инфузионными и трансфузионными системами. Прозрачный корпус коннекторов позволяет визуализировать ток жидкости.

В зависимости от варианта исполнения трубка линии удлинительной может быть изготовлена из прозрачного или светозащитного материала. Стенки светозащитной трубки имеют цвет янтарного стекла и обеспечивают защиту светочувствительных препаратов, не пропуская большую часть видимого света.

Линия удлинительная в зависимости от варианта исполнения может быть с Y или T-образным инъекционным портом для введения лекарственных препаратов.

Фильтр служит для очистки лекарственного препарата от нерастворенных кристаллов антибиотиков, частиц стекла, пластмассы, резины, бумаги, полимерных материалов, бактерий и грибков, а также пузырьков газа, что предотвращает воздушную эмболию. Регулятор скорости потока применяется для инфузии препаратов, требующих дозированного введения.

Линия удлинительная предназначена для проведения внутривенного вливания лекарственных средств, с помощью шприцевого дозатора. Зажим предназначен для регулирования тока жидкости от полного перекрытия до струйного истечения. Безыгольный коннектор предназначен для обеспечения удобного и безопасного доступа для инъекций, аспираций и параллельной инфузии.

Линия инфузионная удлинительная высокого давления спиральная, длиной 150 см – предназначена для удлинения инфузионных линий при проведении инфузии с помощью инфузионных помп и насосов. Включение спиральной инфузионной линии в инфузионную систему увеличивает подвижность инфузионной системы, что облегчает передвижение пациента и персонала во время лечения и повышает безопасность процедуры. Использование спиральной линии снижает риск смещения катетера во время манипуляции.

Линия инфузионная удлинительная с двумя Луер-Лок коннекторами, длиной 10 см, предназначена для подключения двух инфузионных систем, с помощью двух Луер-Лок коннекторов типа «мама» (female).

Технические параметры и характеристики линии удлинительной.

1. Внутренний диаметр трубки линии удлинительной Ø 3.0*4.1 мм – 3,0 мм.
2. Внешний диаметр трубки линии удлинительной Ø 3.0*4.1 мм – 4,1 мм.
3. Внутренний диаметр трубки линии удлинительной Ø 1.0*2.3 мм – 1,0 мм.
4. Внешний диаметр трубки линии удлинительной Ø 1.0*2.3 мм – 2,3 мм.
5. Длина трубки линии удлинительной – 100, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000 или 3000 мм.
6. Внешний диаметр линии инфузионной удлинительной высокого давления спиральной – 2,6 мм.
7. Внешний диаметр линии инфузионной удлинительной высокого давления спиральной – 4,1 мм.
8. Количество витков спирали линии инфузионной удлинительной высокого давления спиральной – не более 20 шт.
9. Размер пор фильтра 1,2 µm – 1.2 мкм.
10. Пропускная способность фильтра 1,2 µm – не менее 30 мл/мин.
11. Размер пор фильтра 0,2 µm – 0,2 мкм.
12. Пропускная способность фильтра 0,2 µm – не менее 3 мл/мин.
13. Размер пор фильтра 5.0 µm – 5,0 мкм.
14. Пропускная способность фильтра 5.0 µm – не менее 50 мл/мин.
15. Длина безыгольного коннектора – 32,5 мм.
16. Внешний диаметр безыгольного коннектора (в самом узком месте) – 7,8 мм.
17. Внешний диаметр безыгольного коннектора (в самом широком месте) – 12,5 мм.
18. Длина Y-образного порта – 37,0 мм.
19. Внешний диаметр Y-образного порта (в самом узком месте) – 7,8 мм.
20. Внешний диаметр Y-образного порта (в самом широком месте) – 12,5 мм.
21. Габаритные размеры T-образного порта (длина×ширина) – 22,0×14,0 мм.
22. Внешний диаметр T-образного порта – 6,0 мм.
23. Высота регулятора потока – 34,0 мм.
24. Внешний диаметр регулятора потока – 30,0 мм.
25. Диапазон регулятора потока – 5-250 мл/ч.

Таблица 1 – Соотношение между диаметром, длиной и объемом заполнения трубки линии удлинительной.

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Длина, мм	Объем заполнения, мл
Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250 или 300 см			
3,0	4,1	100,0	0,6
		300,0	1,8
		500,0	3,0
		800,0	4,8
		1000,0	6,0
		1500,0	9,0
		2000,0	12,0

		2500,0	15,0
		3000,0	18,0
Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250 или 300 см			
1,0	2,3	100,0	0,12
		300,0	0,36
		500,0	0,6
		800,0	0,96
		1000,0	1,2
		1500,0	1,8
		2000,0	2,4
		2500,0	3,0
		3000,0	3,6
Линия инфузионная удлинительная с регулятором потока и У-портом, длиной 10, 30, 50, 80, 100 или 150 см			
3,0	4,1	100,0	1,9
		300,0	3,15
		500,0	4,2
		800,0	5,04
		1000,0	6,3
		1500,0	9,45
Линия инфузионная удлинительная с Т-портом 10 см			
1,0	2,3	100,0	1,3
Линия инфузионная удлинительная с 1-им, 2-мя, или 3-мя безыгольными коннекторами, длиной 10 см			
1,0	2,3	1	0,17
		2	0,35
		3	0,51
Линия инфузионная удлинительная высокого давления спиральная 150 см			
2,6	4,1	1500,0	10,2
Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 5.0 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150 или 200 см			
Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 1.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150 или 200 см			
Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 3.0*4.1 мм с фильтром 0.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см			
3,0	4,1	100,0	1,8
		300,0	3,0
		500,0	4,2
		800,0	6,0
		1000,0	7,2
		1500,0	10,2
		2000,0	13,2
		3000,0	19,2
Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 5.0 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см			

Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 0.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см			
Линия инфузионная удлинительная прозрачная или светозащитная Ø 1.0*2.3 мм с фильтром 1.2 µm, длиной 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 или 300 см			
1,0	2,3	100,0	0,32
		300,	0,56
		500,0	0,8
		800,0	1,16
		1000,0	1,4
		1500,0	2,0
		2000,0	2,6
		3000,0	3,8

Материалы изготовления – поливинилхлорид, поликарбонат, полиэтилен, силикон, каучук синтетический, акрилонитрилбутадиенстирол.

7.3 Фильтр-канюля.

Фильтр-канюля (далее по тексту – канюля) в зависимости от варианта исполнения может быть:

- Фильтр-канюля аспирационная с воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки синяя (1);
- Фильтр-канюля аспирационная с воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки красная (2);
- Фильтр-канюля аспирационная с воздушным фильтром зеленая (3).
- Фильтр-канюля аспирационная с безыгольным коннектором (4).

Внешний вид канюль представлен на рисунках 11-14.



Рисунок 11 – Фотографическое изображение фильтра-канюля аспирационная с воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки синяя.



Рисунок 12 – Фотографическое изображение фильтра-канюля аспирационная с воздушным фильтром зеленая.



Рисунок 13 – Фотографическое изображение фильтра-канюли аспирационной с безыгольным коннектором.

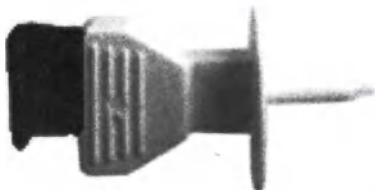


Рисунок 14 – Фотографическое изображение аспирационная с воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки красная.

Канюля состоит из полимерной иглы для прокола пробки флакона, закрытой предохранительным колпачком, и дистального конца, предназначенного для прикрепления к шприцу с целью аспирации жидких фармацевтических препаратов из флаконов или ампул в процессе приготовления лекарственных средств. Фильтр-канюля аспирационная не предназначена для подкожных инъекций или манипуляций с тканями. Канюля используется для многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности. Воздушный фильтр и фильтр тонкой очистки служат для снижения риска микробной контаминации. Фильтры интегрированы внутрь корпуса канюли, что значительно повышает эффективность и безопасность.

Защелкивающаяся крышка позволяет избежать контаминации от прикосновений при работе с коннектором Луэр. Коннектор канюли совместим с разъемами типа Луэр-Слип и Луэр-Лок. Канюля устойчива к спирто- и жиросодержащим растворам.

Фильтр-канюли совместимы с полимерными многодозовыми флаконами объемом от 3 до 1000 мл.

Технические параметры и характеристики фильтр-канюли:

1. Размер пор воздушного канала – 0,3 мкм.
2. Размер пор фильтра тонкой очистки – 5,0 мкм.
3. Длина полимерной иглы – 18,0 мм.
4. Внешний диаметр полимерной иглы – 1,0 мм.
5. Внутренний диаметр полимерной иглы – 0,02 мм.
6. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок – 7,8 мм.
7. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок – 4,2 мм.
8. Внешний диаметр безыгольного коннектора – 13,0 мм.
9. Внутренний диаметр безыгольного коннектора – 2,0 мм.
10. Длина безыгольного коннектора – 23,0 мм.
11. Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – 61,0×30,0×11,0 мм.
12. Габаритные размеры (длина×ширина×высота) – 33,0×19,0×55,0 мм (для Фильтр-канюли аспирационной с безыгольным коннектором).

Материалы изготовления – поликарбонат, акрилонитрилбутадиенстирол и силикон.

7.4 Коннектор безыгольный.

Коннектор безыгольный в зависимости от варианта исполнения может быть:

- Коннектор безыгольный;
- Коннектор безыгольный с прямопоточным клапаном.

Внешний вид коннекторов безыгольных представлен на рисунках 15-16.



Рисунок 15 – Фотографическое изображение коннектора безыгольного.



Рисунок 16 – Фотографическое изображение коннектора безыгольного с прямопоточным клапаном.

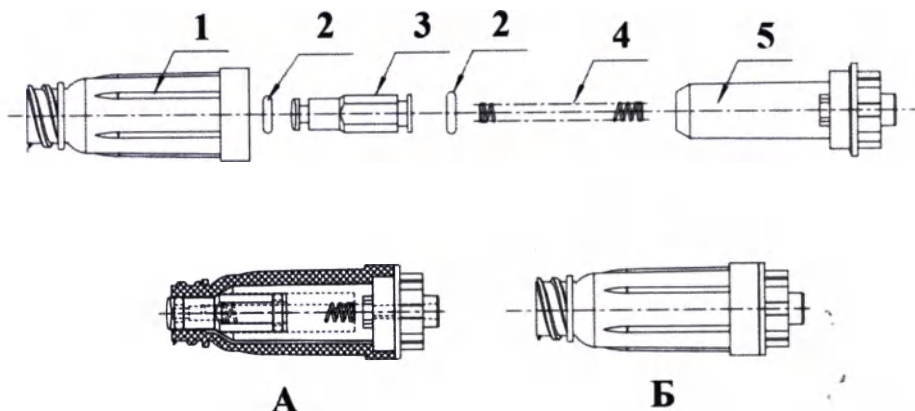


Рисунок 17 – Схематическое изображение коннектора безыгольного с прямопоточным клапаном.

А – внутреннее устройство коннектора; Б – внешний вид коннектора;

- 1 – корпус;
- 2 – уплотнительное кольцо;
- 3 – плунжер;
- 4 – пружина;
- 5 – внутренний корпус.

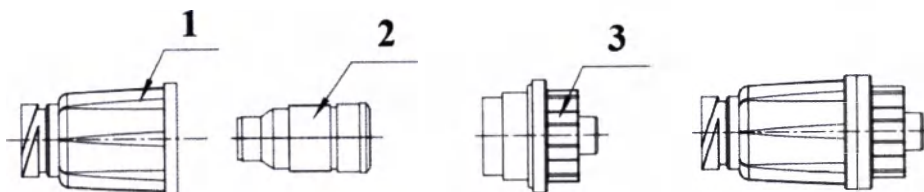


Рисунок 18 – Схематическое изображение коннектора безыгольного.

- 1 – корпус;
 2 – силиконовый уплотнитель;
 3 – внутренний корпус.

Коннектор безыгольный состоит из корпуса и уплотнителя из силикона. Коннектор безыгольный имеет небольшой размер и прозрачный корпус, что обеспечивает комфортное использование изделия. Коннектор безыгольный с прямооточным клапаном состоит из корпуса, уплотнительного кольца, плунжера и пружины. Коннектор безыгольный с прямооточным клапаном представляет собой небольшой автономный Луер-активируемый безыгольный пластиковый клапан, предназначенный для сопряжения двух связанных устройств инфузионной системы внутривенных вливаний (например, шприца для подкожных инъекций и порта катетера или трубки из набора для внутривенных вливаний) и удерживания их в безопасном, герметичном, фиксированном положении до разъединения, при котором возникает минимальный поток жидкости в или из катетера/трубки.

Коннектор предназначен для исключения использования игл для внутривенного введения лекарств. Это изделие одноразового использования. Коннекторы используются для соединения инфузионной линии и катетера со стороны пациента при внутривенном вливании лекарственных средств. Обеспечивают удобный и безопасный безыгольный доступ для инъекций, аспираций и параллельной инфузии. Внутреннее пространство коннекторов не имеет мертвого пространства, что уменьшает количество крови и лекарственного осадка, попадающих в коннектор. Большое внутреннее пространство коннектора безыгольного подходит для использования с катетером, имеющим высокую скорость потока, таким как катетер для гемодиализа. Возможно использование коннектора при необходимости проведения магнитно-резонансного сканирования пациента без удаления коннектора. Выступающая конструкция на корпусе коннектора (рисунки 17 и 18, составляющая часть № 1) представляет собой инъекционный порт, соответствующий протоколу инфекционного контроля.

Высококачественный силиконовый уплотнитель (уплотнитель или уплотнительное кольцо, в зависимости от варианта исполнения), обеспечивает герметичность и снижает вероятность образования пузырьков воздуха, попадания жидкости или посторонних материалов внутрь системы и позволяет осуществлять многократное введение лекарственных средств без утечки.

Технические параметры и характеристики коннектора безыгольного:

1. Длина коннектора безыгольного – 24,0 мм.
2. Длина коннектора безыгольного – 36,0 мм (для коннектора безыгольного с прямооточным клапаном).
3. Внешний диаметр коннектора безыгольного – 12,02 мм.
4. Внешний диаметр коннектора безыгольного – 12,5 мм (для коннектора безыгольного с прямооточным клапаном).

5. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 2,0 мм.
6. Внутренний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 4,16 мм.
7. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «мама» (female) – 10,8 мм.
8. Внешний диаметр коннектора Луер-Лок типа «папа» (male) – 7,7 мм.
9. Общая длина корпуса – 23,75 мм.
10. Общая длина корпуса – 35,91 мм (для коннектора безыгольного с прямопоточным клапаном).
11. Длина внутреннего корпуса – 16,75 мм.
12. Длина внутреннего корпуса – 30,11 мм (для коннектора безыгольного с прямопоточным клапаном).
13. Объем заполнения – от 0,09 до 0,12 мл.
14. Объем заполнения – от 0,098 мл (для коннектора безыгольного с прямопоточным клапаном).

Материалы изготовления – поликарбонат, силиконовая резина и нержавеющей сталь.

7.5 Заглушка инфузионная.

Зажушка инфузионная (далее по тексту – зажушка) в зависимости от варианта исполнения может быть:

- Зажушка инфузионная Луер-Лок красная;
- Зажушка инфузионная Луер-Лок синяя;
- Зажушка инфузионная с мембраной желтая;
- Зажушка инфузионная с мембраной прозрачная.

Внешний вид зажушки представлен на рисунках 17-18.



Рисунок 17 – Фотографическое изображение зажушки инфузионной Луер-Лок.



Рисунок 18 – Фотографическое изображение зажушки инфузионной с мембраной.

Зажушка используется для сохранения стерильности и предотвращения утечки содержимого шприцев, портов сосудистых катетеров, коннекторов инфузионных систем. Зажушка имеет винтовое соединение типа Луер-Лок.

Зажушка с мембранной обеспечивает возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая зажушки.

Технические параметры и характеристики заглушки желтой:

1. Длина заглушки – 18,6 мм.
2. Внешний диаметр заглушки – 10,0 мм.
3. Внутренний диаметр – 3,0 мм.
4. Объем заполнения – 0,3 мл.
5. Габаритные размеры мембраны (длина×ширина) – 3,0×0,5 мм.

Технические параметры и характеристики заглушки прозрачной:

1. Длина заглушки – 18,9 мм.
2. Внешний диаметр заглушки – 9,8 мм.
3. Внутренний диаметр – 3,0 мм.
4. Объем заполнения – 0,1 мл.
5. Габаритные размеры мембраны (длина×ширина) – 3,0×0,5 мм.

Технические параметры и характеристики заглушки красной:

1. Длина заглушки – 18,3 мм.
2. Внешний диаметр заглушки – 9,8 мм.
3. Внутренний диаметр – 3,0 мм.
4. Объем заполнения – 0,3 мл.

Технические параметры и характеристики заглушки красной:

1. Длина заглушки – 18,3 мм.
2. Внешний диаметр заглушки – 9,8 мм.
3. Внутренний диаметр – 3,0 мм.
4. Объем заполнения – 0,5 мл.

Материалы изготовления – акрилонитрилбутадиенстирол, поликарбонат и полиэтилен.

8 Комплектность.

Комплект поставки изделия представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки изделия.

Наименование	Количество, шт
Набор для инфузионной терапии Mederen, в зависимости от варианта исполнения	
Кран инфузионный трехходовой в индивидуальной упаковке, в зависимости от варианта исполнения	Количество прописано в варианте исполнения
Линия инфузионная удлинительная в индивидуальной упаковке, в зависимости от варианта исполнения	Количество прописано в варианте исполнения
Коннектор безыгольный в индивидуальной упаковке, в зависимости от варианта исполнения	Количество прописано в варианте исполнения
Фильтр-канюля в индивидуальной упаковке, в зависимости от варианта исполнения	Количество прописано в варианте исполнения

Заглушка инфузионная в индивидуальной упаковке, в зависимости от варианта исполнения	Количество прописано в варианте исполнения
Инструкция по применению	1 шт
Потребительская упаковка	1 шт

9 Упаковка.

Каждая составная часть набора упаковывается в индивидуальную в упаковку на основе полиэтилена и медицинской бумаги, а затем в количестве, прописанном в варианте исполнения набора, укладывается в потребительскую упаковку, представляющую собой картонную коробку.

- габаритные размеры индивидуальной упаковки, не более – 450×250×5 мм;
- габаритные размеры потребительской упаковки, не более - 600×500×500 мм;
- масса потребительской упаковки - не более 2 кг.

10 Маркировка.

На упаковку нанесены следующие манипуляционные символы:

Символ	Обозначение
	Использовать до ...
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Не стерилизовать повторно
	Сведения о производителе
	Запрет на повторное применение
	Не использовать при повреждении упаковки

	Стерилизация оксидом этилена
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон
	Не содержит натуральный латекс
	Не содержит фталаты
	Апирогенно
NON TOXIC	Не токсично
	Особая утилизация
	Знак соответствия при декларировании соответствия

11 Указания по применению.

11.1 Показания к применению:

- проведение инфузионно-трансфузионной терапии;
- парентеральное питание;
- химиотерапия.

11.2 Противопоказания к применению:

- введение жидкостей высокой вязкости;
- не использовать у пациентов с известной гиперчувствительностью к какому-либо используемому материалу.

11.3 Возможные побочные действия:

- воздушная эмболия, возникающая в результате: всасывания воздуха в открытые вены с низким центральным венозным давлением; нарушения герметичности или недостаточного наполнения системы в связи с нарушением методики проведения инфузии;
- нарушения скорости вливания растворов, что становится причиной перегрузки сердца, повреждения целостности эндотелия сосудов, гидратации (отека мозга и легких);
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлена система.

11.4 Порядок работы.

Подготовка к использованию:

1. Осмотрите упаковку на предмет повреждения.
2. В случае отсутствия следов повреждения извлеките из нее необходимый компонент в зависимости от потребности:
 - фильтр-канюлю аспирационную
 - линию инфузионную удлинительную
 - кран инфузионный трехходовой
 - заглушку инфузионную
 - коннектор безыгольный

Далее смотрите способ применения каждого компонента набора.

11.5 Фильтр-канюля аспирационная.

11.5.1. Назначение медицинского изделия.

Фильтр-канюля аспирационная используется для забора жидких лекарственных средств из многодозовых контейнеров.

11.5.2. Показания к применению

- забор жидких лекарственных средств из многодозовых флаконов;
- приготовление готовых к использованию растворов.

11.5.3. Противопоказания

Фильтр-канюля аспирационная является неинвазивным медицинским изделием. Абсолютных противопоказаний нет.

11.5.4. Возможные побочные действия

Осложнения при применении фильтр-канюли аспирационной будут связаны не напрямую с медицинским изделием, а являться следствием нарушения техники ее использования.

11.5.5. Способ применения

1. Удалите защитную крышку с лекарственного флакона и продезинфицируйте пробку.
2. Вскройте индивидуальную упаковку и извлеките изделие.
3. Снимите защитный чехол с наконечника фильтр-канюли.
4. Проколите пробку флакона наконечником.

5. Откройте верхнюю крышку.

6. Присоедините шприц (без иглы) к стандартному коннектору Луер-Лок и наберите требуемое количество препарата из флакона.

11.6 Линия инфузионная удлинительная.

- Стенки линии должны быть цвета янтарного стекла и обеспечивать защиту светочувствительных препаратов, не пропуская большую часть видимого света; диапазон длин волн УФ-лучей, которые линия не пропускает (для светозащитных линий).

11.6.1. Назначение медицинского изделия:

Предназначена для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора.

11.6.2. Показания к применению:

- проведение инфузионной терапии;
- удлинение более сложных инфузионных магистралей.

11.6.3. Противопоказания:

Наличие у пациента гиперчувствительности к материалам, из которых изготовлена линия.

11.6.4. Возможные побочные действия:

Осложнения при применении линии инфузионной удлинительной будут связаны не напрямую с медицинским изделием, а являться следствием нарушения техники ее использования.

11.6.5. Способ применения:

1. Вскройте индивидуальную упаковку и извлеките изделие.
2. Соедините дистальный коннектор линии с коннектором системы для инфузии.
3. Заполните удлинительную линию раствором для инфузии.
4. Соедините проксимальный коннектор линии с внутривенным катетером или краником.
5. Начните инфузию.

11.7. Кран инфузионный трехходовой.

- Наличие поворотных лопастей со стрелками, указывающих направление тока жидкости.

11.7.1. Назначение медицинского изделия:

Кран инфузионный трехходовой используется для соединения нескольких инфузионных и трансфузионных систем и регулирования потоков внутривенного раствора.

11.7.2. Показания к применению:

- Одновременное внутривенное вливание двух различных жидкостей;
- Прерывистое внутривенное введение лекарственных препаратов;
- Изменение направлений потока жидкостей.

11.7.3. Противопоказания:

- Не использовать при введении жировых эмульсий;
- Наличие у пациента гиперчувствительности к материалам, из которых изготовлен кран.

11.7.4. Возможные побочные действия:

Осложнения при применении крана инфузионного трехходового будут связаны не напрямую с медицинским изделием, а являться следствием нарушения техники ее использования.

11.7.5. Способ применения:

1. Проверьте целостность упаковки и срок годности, а затем извлеките из нее кран.
2. Снимите колпачки с коннекторов Луер-Лок.
3. Соедините удлинительную линию или другие устройства в соответствии с требованиями методики процедуры с соответствующим коннектором крана.
4. Удалите воздух из крана и удлинительной линии.
5. Соедините систему с пациентом.

11.8. Кран инфузионный трехходовой липидорезистентный.

11.8.1. Назначение медицинского изделия:

Кран инфузионный трехходовой используется для соединения нескольких инфузионных и трансфузионных систем и регулирования потоков внутривенного раствора.

11.8.2. Показания к применению:

- Одновременное внутривенное вливание двух различных жидкостей;
- Прерывистое внутривенное введение лекарственных препаратов;
- Изменение направлений потока жидкостей;
- Введение жировых эмульсий;
- Химиотерапия с применением цитостатиков.

11.8.3. Противопоказания:

- Наличие у пациента гиперчувствительности к материалам, из которых изготовлен кран.

11.8.4. Возможные побочные действия:

Осложнения при применении крана инфузионного трехходового будут связаны не напрямую с медицинским изделием, а являться следствием нарушения техники ее использования.

11.8.5. Способ применения:

1. Проверьте целостность упаковки и срок годности, а затем извлеките из нее кран.
2. Снимите колпачки с коннекторов Луер-Лок.
3. Соедините удлинительную линию или другие устройства в соответствии с требованиями методики процедуры с соответствующим коннектором крана.
4. Удалите воздух из крана и удлинительной линии.
5. Соедините систему с пациентом.

11.9. Заглушка инфузионная.

11.9.1. Назначение медицинского изделия:

Зажушка инфузионная используется для сохранения стерильности и предотвращения утечки содержимого шприцев, портов сосудистых катетеров, коннекторов инфузионных систем.

11.9.2. Показания к применению:

- герметичное закрытие портов периферических и центральных венозных катетеров, коннекторов инфузионных систем;
- введение лекарственных средств в устройства сосудистого доступа (для зажушек с мембраной).

11.9.3. Противопоказания

- Наличие у пациента гиперчувствительности к материалам, из которых изготовлена заглушка.

11.9.4. Возможные побочные действия

Осложнения при применении заглушки инфузионной будут связаны не напрямую с медицинским изделием, а являться следствием нарушения техники ее использования.

11.9.5. Способ применения:

1. Проверьте целостность упаковки и срок годности, а затем извлеките из нее заглушку.
2. Соедините заглушку с коннектором Луер-Лок имеющегося устройства.

11.10. Коннектор безыгольный.

11.10.1. Назначение медицинского изделия:

Предназначен для безыгольного доступа при внутривенном введении лекарственных препаратов.

11.10.2. Показания к применению:

- соединение с инфузионными системами при введении лекарств, аспирации, проведении инфузий;
- дополнительное введение лекарственных средств.

11.10.3. Противопоказания:

- Наличие у пациента гиперчувствительности к материалам, из которых изготовлен коннектор.

11.10.4. Возможные побочные действия:

Осложнения при применении коннектора безыгольного будут связаны не напрямую с медицинским изделием, а являться следствием нарушения техники его использования.

11.10.5. Способ применения:

1. Проверьте целостность упаковки и срок годности, а затем аккуратно извлеките из нее коннектор, не касаясь мембраны.
2. Прозеинфицируйте мембрану безыгольного коннектора.
3. Присоедините шприц с разъемом Луер-Слип или Луер-Лок с уже набранным раствором.
4. Промойте устройство и вращательными движениями присоедините дистальный конец безыгольного коннектора со шприцем к порту венозного катетера.
5. Далее приступите к введению растворов или аспирации с помощью присоединения фитинга с фиксатором Луер без иглы.

12 Сведения о техническом обслуживании, текущий ремонт.

Изделия однократного применения, техническому обслуживанию и текущему ремонту не подлежат.

13 Условия эксплуатации.

Изделия применяются в помещениях в следующих климатических условиях:

- температура тела пациента: от плюс 32 до 42 °C;
- температура воздуха: от плюс 10°C до 35 °C;
- относительная влажность воздуха: 60-80%;

- атмосферное давление: 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.).

14 Транспортирование.

Упакованные изделия транспортируют всеми видами закрытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортируются изделия в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от минус 5 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха: 60-80%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

15 Хранение.

Хранение изделий осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- температура воздуха: от плюс 5 до плюс 35 °С;
- относительная влажность воздуха: 60-80%;
- атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

Хранение изделий должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте

16 Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует соответствие изделия заявленным в документации показателям качества и характеристикам при соблюдении правил транспортирования и хранения в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием изделий; не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых повторной обработке или стерилизации, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

Таблица № 3 - Срок годности, хранения и сохранения стерильности 3 или 5 лет, в зависимости от варианта исполнения.

3 года	5 лет
REF 1416-M100-01, 1416-M100-02, 1416-M100-03, 1416-ML100-04, 1416-ML100-05, 1416-ML100-06, 1416-M200-10, 1416-M200-30, 1416-M200-50, 1416-M200-80, 1416-M200-100, 1416-M200-150, 1416-M300-10, 1416-M300-30, 1416-M300-50, 1416-M300-80, 1416-M300-100, 1416-M300-150, 1416-M300-200, 1416-M300-250, 1416-M300-300, 1416-M300LP-10, 1416-M300LP-30, 1416-M300LP-50, 1416-M300LP-80, 1416-M300LP-100, 1416-M300LP-150, 1416-M300LP-200, 1416-M300LP-250, 1416-	REF 1416-M100-07, 1416-M200-01, 1416-M200-02, 1416-ML702-10, 1416-M200-03, 1416-M200-04, 1416-M800-01, 1416-M800-02

M300LP-300, 1416-M400-10, 1416-M400-30, 1416-M400-50, 1416-M400-80, 1416-M400-100, 1416-M400-150, 1416-M400-200, 1416-M400-250, 1416-M400-300, 1416-M400LP-10, 1416-M400LP-30, 1416-M400LP-50, 1416-M400LP-80, 1416-M400LP-100, 1416-M400LP-150, 1416-M400LP-200, 1416-M400LP-250, 1416-M400LP-300, 1416-M500-30, 1416-M500-50, 1416-M500-80, 1416-M500-100, 1416-M500-150, 1416-M600T-10, 1416-M701-10, 1416-M702-10, 1416-M703-10, 1416-M300-10F1.2, 1416-M300-30F1.2, 1416-M300-50F1.2, 1416-M300-80 F1.2, 1416-M300-100F1.2, 1416-M300-150F1.2, 1416-M300-200F1.2, 1416-M300-10F0.2, 1416-M300-30F0.2, 1416-M300-50F0.2, 1416-M300-80F0.2, 1416-M300-100F0.2, 1416-M300-150F0.2, 1416-M300-200F0.2, 1416-M300-300F0.2, 1416-M300-10F5.0, 1416-M300-30F5.0, 1416-M300-50F5.0, 1416-M300-80F5.0, 1416-M300-100F5.0, 1416-M300-150F5.0, 1416-M300-200F5.0, 1416-M300LP-10F1.2, 1416-M300LP-30F1.2, 1416-M300LP-50F1.2, 1416-M300LP-80F1.2, 1416-M300LP-100F1.2, 1416-M300LP-150F1.2, 1416-M300LP-200F1.2, 1416-M300LP-10F0.2, 1416-M300LP-30F0.2, 1416-M300LP-50F0.2, 1416-M300LP-80F0.2, 1416-M300LP-100F0.2, 1416-M300LP-150F0.2, 1416-M300LP-200F0.2, 1416-M300LP-300F0.2, 1416-M300LP-10F5.0, 1416-M300LP-30F5.0, 1416-M300LP-50F5.0, 1416-M300LP-80F5.0, 1416-M300LP-100F5.0, 1416-M300LP-150F5.0, 1416-M300LP-200F5.0, 1416-M400-10F1.2, 1416-M400-30F1.2, 1416-M400-50F1.2, 1416-M400-80F1.2, 1416-M400-100F1.2, 1416-M400-150F1.2, 1416-M400-200F1.2, 1416-M400-10F0.2, 1416-M400-30F0.2, 1416-M400-50F0.2, 1416-M400-80F0.2, 1416-M400-100F0.2, 1416-M400-150F0.2, 1416-M400-200F0.2, 1416-M400-300F0.2, 1416-M400-10F5.0, 1416-M400-30F5.0, 1416-M400-50F5.0, 1416-M400-80F5.0, 1416-M400-100F5.0, 1416-M400-150F5.0, 1416-M400-200F5.0, 1416-M400LP-10F1.2, 1416-M400LP-30F1.2, 1416-M400LP-50F1.2, 1416-M400LP-80F1.2, 1416-M400LP-100F1.2,

1416-M400LP-150F1.2, 1416-M400LP-200F1.2, 1416-M400LP-300F1.2, 1416-M400LP-10F0.2, 1416-M400LP-30F0.2, 1416-M400LP-50F0.2, 1416-M400LP-80F0.2, 1416-M400LP-100F0.2, 1416-M400LP-150F0.2, 1416-M400LP-200F0.2, 1416-M400LP-300F0.2, 1416-M400LP-10F5.0, 1416-M400LP-30F5.0, 1416-M400LP-50F5.0, 1416-M400LP-80F5.0, 1416-M400LP-100F5.0, 1416-M400LP-150F5.0, 1416-M400LP-200F5.0, 1416-M400LP-300F5.0, 1416-M700C-150, 1416-M100-11, 1416-M100-12, 1416-M100-13, 1416-M100-14	
---	--

17 Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия.

После применения изделия по назначению они должны быть утилизированы как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.

При истечении срока годности и/или нарушении целостности герметичной упаковки, изделия должны быть утилизированы, как медицинские отходы класса «Эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам» в соответствии с правилами, действующими в медицинском учреждении.

Утилизация производится в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

17 Контактная информация.

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:

Уполномоченная организация по вопросам качества:

ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

197229, город Санкт-Петербург, Проспект Лахтинский, дом 113, корпус ЛИТЕР А, офис 2

Тел. 8 (812) 627 21 41, e-mail: info@alfamedex.

№ 970/21

Я, нижеподписавшаяся, Зингерман Орли, нотариус, номер лицензии 299856, адрес ул. Жаботинского, 35, г. Рамат Ган, Израиль, настоящим документом подтверждаю, что 20.09.2021, в моем присутствии находилась госпожа Чертков Светлана, личность которой установлена мной в соответствии с предъявленным мне паспортом государства Израиль № 21807002

Выданным 11.09 2014 года в городе Кфар Саба, в Израиле.

Я убедилась, что госпожа Чертков Светлана, поняла смысл данного документа и подписала его по собственному желанию, обозначенный буквой «А» от имени корпорации MEDEREN NEOTECH LTD No. 515505329, находящейся в Тель-Авиве, Израиль.

Как подтверждение сказанному выше, госпожа Чертков Светлана подписала приложенный документ, обозначенный буквой «А» выданный от имени корпорации.

В подтверждении этого я, удостоверяю подпись госпожи Чертков Светланы своей личной подписью.

Дата 20.09.2021

Нотариус + 322 НДС

Печать и подпись нотариуса

\подпись\

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС
ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС
ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

На каждой странице сверху:

МЕДЕРЕН НЕОТЕХ ЛТД. (MEDEREN NEOTECH LTD.)

Адрес: ул. Харакевет, д. 58, Тель-Авив, Яффа, Израиль, почтовый индекс: 6777016

Корпорация номер: 515505329

www.mederen.com info@mederen.com

УТВЕРЖДЕНО

Медерен Неотех Лимитед

/подпись/

Штамп: Медерен Неотех Лтд. (Mederen Neotech Ltd.) * 515505329

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор для инфузионной терапии MEDEREN

/документ представлен на русском языке, в переводе не нуждается/

А

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ • НОТАРИУС

/подпись/

Я, **Матвеева Анна Михайловна**, дипломированный переводчик, владеющая русским и английским языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Переводчик:

Матвеева Анна Михайловна

Санкт-Петербург, Российская Федерация,

двадцать восьмого сентября две тысячи двадцать первого года.

Я, Курносова Юлия Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Демидовой Нины Анатольевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Матвеевой Анны Михайловны**.

Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № *44/22-4/48-2021-15-532*

Уплачено за совершение нотариального действия: 500 руб. 00 коп.



Ю.С. Курносова

Ю.С. Курносова

Итого в настоящем документе

64

64/шестьдесят четыре) листа

Вр.и.о. нотариуса

Ю.С. Курносова

Ю.С. Курносова

