

Проекты маркировки медицинского изделия
«Бинты эластичные по ТУ ВУ 291407855.001-2020»,
производства ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь

Проект маркировочной этикетки потребительской упаковки на территории РФ
Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный с низкой растяжимостью



Бинты эластичные по ТУ ВУ 291407855.001-2020

Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный
с низкой растяжимостью – 1 шт.

- клипса для фиксации свободного края бинта – 2 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

Размер: 12 см x 5 м

Партия: ХХ

Номер серии: ХХХХ

Артикул: ХХ-ХХХ

Дата изготовления: ХХ.ХХХ

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Изделие предназначено для фиксации повязок, наложения компрессионных повязок в профилактике и комплексном лечении варикозной болезни ног, лимфостаза, травм связок, суставов и мышц.

Изделие предназначено для реализации и использования в медицинских целях или населением.

НЕСТЕРИЛЬНО! ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ДЫШАЩИЙ СОСТАВ.

Материал изготовления бинта: пряжа хлопчатобумажная, нить полиэфирная, нить лайкра.

Материал изготовления клипсы: алюминий, нить полиэфирная, нить латексная
ТУ ВУ 291407855.001-2020

Производитель: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Стафеева, д. 1 оф. 86

Тел. +375(33) 689-07-70; e-mail: medeurocompany@gmail.com:

Место производства: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, 224020, Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 13, оф. 202А, 203

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МедЛабРус», 141102, Московская обл., Щелковский р-н, г.

Щелково, ул. Центральная, дом 96, корпус 3, квартира 95

Тел.: +7(495)152-05-65; e-mail: medlabrus2015@yandex.ru

РУ № _____



Проект маркировочной этикетки потребительской упаковки на территории РФ
Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный со средней растяжимостью



Бинты эластичные по ТУ ВУ 291407855.001-2020

Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный
со средней растяжимостью – 1 шт.

- клипса для фиксации свободного края бинта – 2 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

Размер: 12 см x 5 м

Партия: XX

Номер серии: XXXX

Артикул: XX-XXX

Дата изготовления: XX.XXX

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Изделие предназначено для фиксации повязок, наложения компрессионных повязок в профилактике и комплексном лечении варикозной болезни ног, лимфостаза, травм связок, суставов и мышц.

Изделие предназначено для реализации и использования в медицинских целях или населением.

НЕСТЕРИЛЬНО! ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ДЫШАЩИЙ СОСТАВ.

Материал изготовления бинта: пряжа хлопчатобумажная, нить полиэфирная, нить лайкра.

Материал изготовления клипсы: алюминий, нить полиэфирная, нить латексная
ТУ ВУ 291407855.001-2020

Производитель: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Стафеева, д. 1 оф. 86

Тел. +375(33) 689-07-70; e-mail: medeurocompany@gmail.com:

Место производства: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, 224020, Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 13, оф. 202А, 203

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МедЛабРус», 141102, Московская обл., Щелковский р-н, г.

Щелково, ул. Центральная, дом 96, корпус 3, квартира 95

Тел.: +7(495)152-05-65; e-mail: medlabrus2015@yandex.ru

РУ № _____



Проект маркировочной этикетки потребительской упаковки на территории РФ
Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный с высокой растяжимостью



Бинты эластичные по ТУ ВУ 291407855.001-2020

Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный
с высокой растяжимостью – 1 шт.

- клипса для фиксации свободного края бинта – 2 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

Размер: 12 см х 6 м

Партия: ХХ

Номер серии: ХХХХ

Артикул: ХХ-ХХХ

Дата изготовления: ХХ.ХХХ

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Изделие предназначено для фиксации повязок, наложения компрессионных повязок в профилактике и комплексном лечении варикозной болезни ног, лимфостаза, травм связок, суставов и мышц.

Изделие предназначено для реализации и использования в медицинских целях или населением.

НЕСТЕРИЛЬНО! ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ДЫШАЩИЙ СОСТАВ.

Материал изготовления бинта: пряжа хлопчатобумажная, нить полиэфирная, нить лайкра.

Материал изготовления клипсы: алюминий, нить полиэфирная, нить латексная
ТУ ВУ 291407855.001-2020

Производитель: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Стафеева, д. 1 оф. 86

Тел. +375(33) 689-07-70; e-mail: medeurocompany@gmail.com:

Место производства: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, 224020, Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 13, оф. 202А, 203

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МедЛабРус», 141102, Московская обл., Щелковский, р-н, г. Щелково, ул. Центральная, дом 96, корпус 3, квартира 95

Тел.: +7(495)152-05-65; e-mail: medlabrus2015@yandex.ru

РУ № _____



Проект маркировочной этикетки потребительской упаковки на территории РФ
Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный со средней растяжимостью с шерстяной нитью



Бинты эластичные по ТУ ВУ 291407855.001-2020

Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный со средней растяжимостью с шерстяной нитью – 1 шт.
- клипса для фиксации свободного края бинта – 2 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

Размер: 12 см х 4 м

Партия: XX

Номер серии: XXXX

Артикул: XX-XXX

Дата изготовления: XX.XXX

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Изделие предназначено для фиксации повязок, наложения компрессионных повязок в профилактике и комплексном лечении варикозной болезни ног, лимфостаза, травм связок, суставов и мышц.

Изделие предназначено для реализации и использования в медицинских целях или населением.

НЕСТЕРИЛЬНО! ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ДЫШАЩИЙ СОСТАВ.

Материал изготовления бинта: пряжа хлопчатобумажная, нить полиэфирная, нить лайкра, пряжа полушерстяная

Материал изготовления клипсы: алюминий, нить полиэфирная, нить латексная
ТУ ВУ 291407855.001-2020

Производитель: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Стафеева, д. 1 оф. 86

Тел. +375(33) 689-07-70; e-mail: medeurocompany@gmail.com:

Место производства: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, 224020, Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 13, оф. 202А, 203

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МедЛабРус», 141102, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Центральная, дом 96, корпус 3, квартира 95

Тел.: +7(495)152-05-65; e-mail: medlabrus2015@yandex.ru

РУ № _____



Проект маркировочной этикетки потребительской упаковки на территории РФ
Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный со средней растяжимостью с полиэфирной нитью с ионами серебра



Бинты эластичные по ТУ ВУ 291407855.001-2020

Вариант исполнения: Бинт эластичный компрессионный со средней растяжимостью с полиэфирной нитью с ионами серебра – 1 шт.

- клипса для фиксации свободного края бинта – 2 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

Размер: 12 см x 5 м

Партия: XX

Номер серии: XXXX

Артикул: XX-XXX

Дата изготовления: XX.XXX

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Изделие предназначено для фиксации повязок, наложения компрессионных повязок в профилактике и комплексном лечении варикозной болезни ног, лимфостаза, травм связок, суставов и мышц.

Изделие предназначено для реализации и использования в медицинских целях или населением.

НЕСТЕРИЛЬНО! ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ ДЫШАЩИЙ СОСТАВ.

Материал изготовления бинта: пряжа хлопчатобумажная, нить полиэфирная с ионами серебра, нить лайкра

Материал изготовления клипсы: алюминий, нить полиэфирная, нить латексная
ТУ ВУ 291407855.001-2020

Производитель: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Стафеева, д. 1 оф. 86

Тел. +375(33) 689-07-70; e-mail: medeurocompany@gmail.com:

Место производства: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, 224020, Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 13, оф. 202А, 203

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МедЛабРус», 141102, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Центральная, дом 96, корпус 3, квартира 95

Тел.: +7(495)152-05-65; e-mail: medlabrus2015@yandex.ru

РУ № _____




Проект маркировки транспортной упаковки изделия на территории РФ

Бинт эластичный компрессионный со средней растяжимостью с полиэфирной нитью с ионами серебра 12 см х 8 м

Количество упаковок: XX шт.

Вес брутто X,0 кг

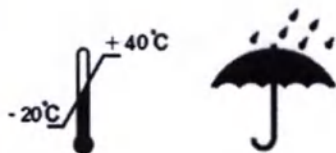

РУ № _____

ТУ BY 291407855.001-2020



Производитель: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, г. Брест, ул. Стафеева, д. 1 оф. 86

Тел. +375(33) 689-07-70; e-mail: medeurocompany@gmail.com:

Место производства: ООО «МедЕвроКомпани», Республика Беларусь, 224020, Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 13, оф. 202А, 203

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МедЛабРус», 141102, Московская обл., Щелковский р-н, г.

Щелково, ул. Центральная, дом 96, корпус 3, квартира 95

Тел.: +7(495)152-05-65; e-mail: medlabrus2015@yandex.ru



Секретариат ООО "МедЛабрис" г. Серпухов
Тел: 8 (495) 503-08-50

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МедЛабРус»

Э.С. Петрик

М.П.

«06» октября 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И УПАКОВОК
«БИНТЫ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПО ТУ ВУ 291407855.001-2020»**

Макет маркировки транспортной упаковки



Бинт эластичный компрессионный с низкой растяжимостью 12
см x 10,0 м

TU BY 291407855.001-2020

РУ № xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx г.



Производитель:

ООО «**MedEuroCompany**»

Юр. адрес: Республика Беларусь,

Брестская область, г. Брест, ул. Стаффеа, 1-86

тел: +375 (33) 6949946

e-mail: medeurocompany@gmail.com

Адрес производства: Республика Беларусь,

Брестская область, г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 13, пом. 202А, 203

Уполномоченный представитель:

ООО «**MedLabRus**»

Россия, Московская обл., Щелковский р-н, Щелково г.

Центральная ул., дом 96, корпус 3, квартира 95

тел: +7 (495) 152-05-65, +7 (925) 386-55-12

medlabrus2015@vandex.ru



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БИНТЫ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПО ТУ ВУ 291407855.001-2020» В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ С
МАРКИРОВКОЙ И БЕЗ.**





Бинт эластичный компрессионный с низкой растяжимостью 12 см x 5,0 м.



Бинт эластичный компрессионный со средней растяжимостью 12 см x 5,0 м.



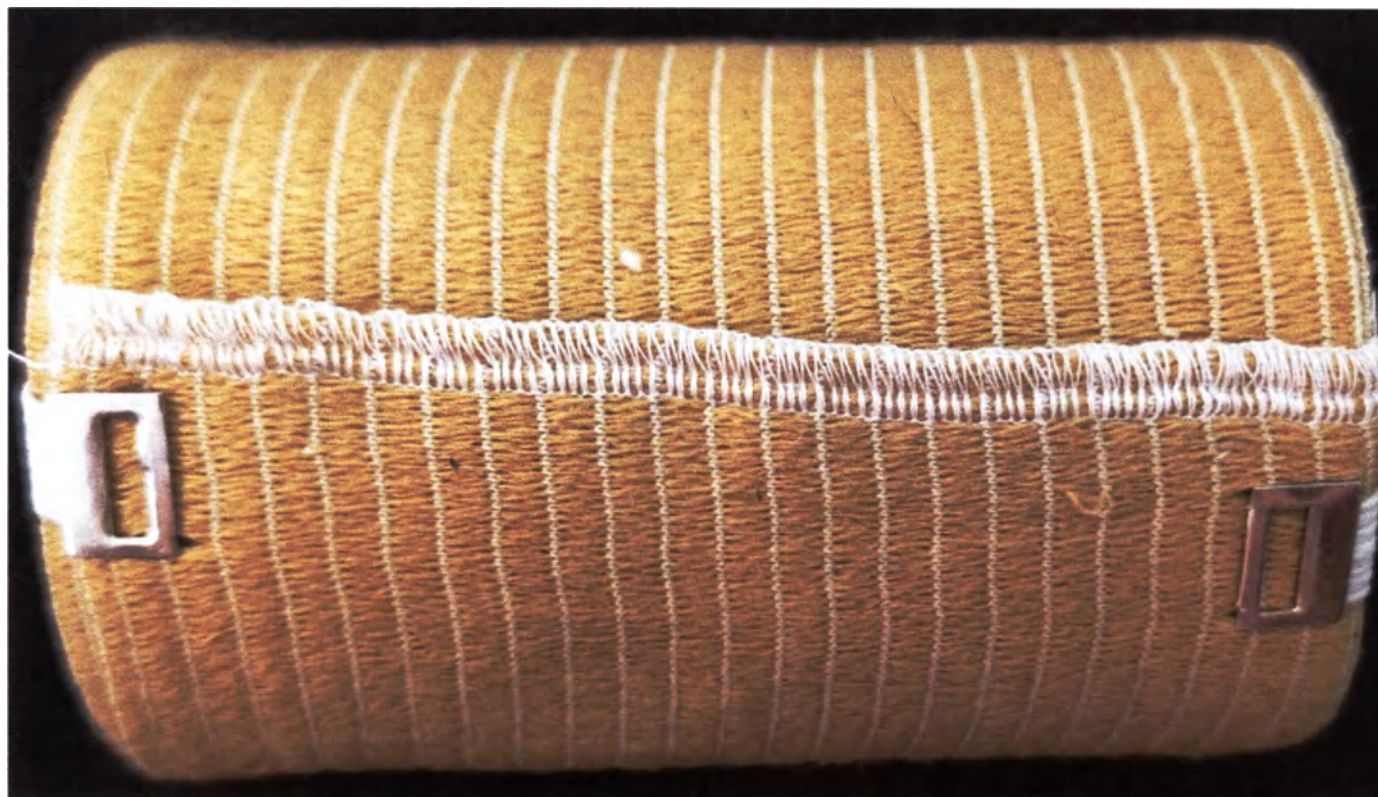

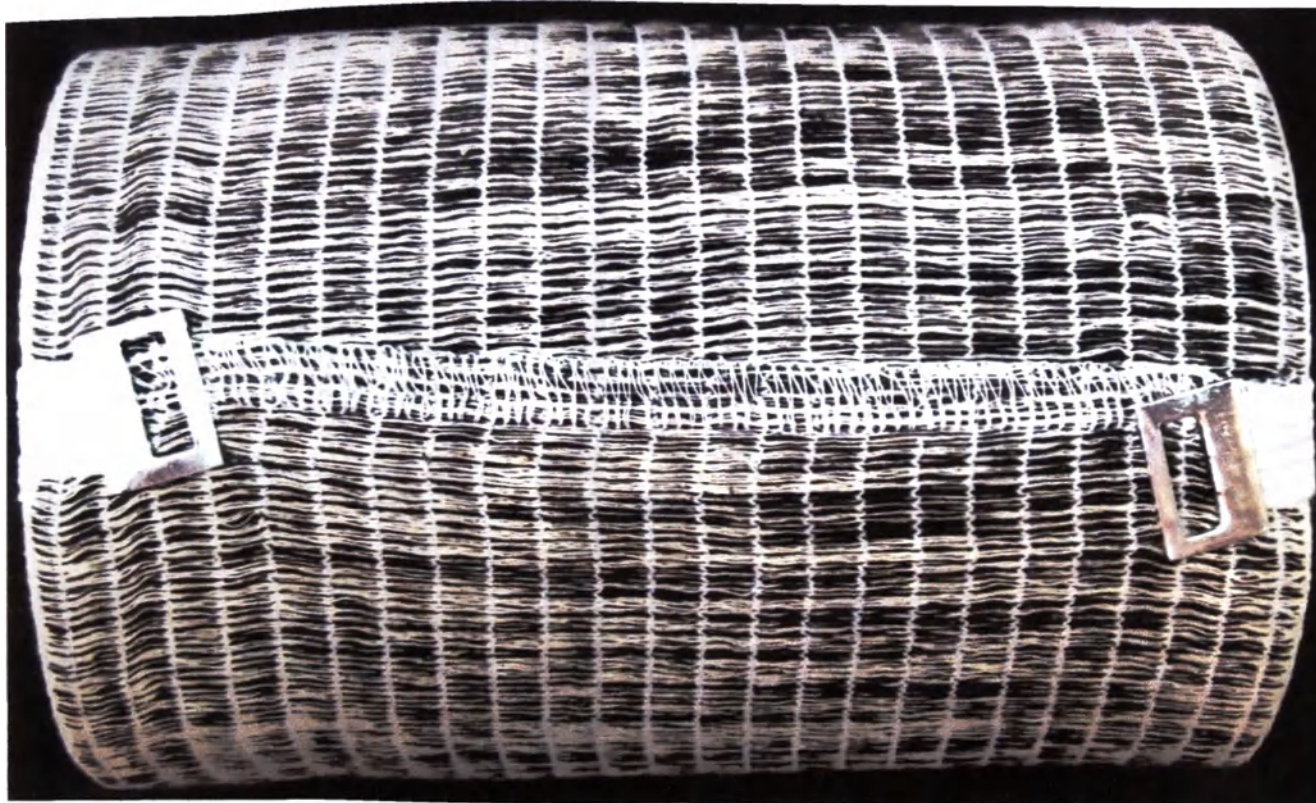

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ВЯЗАНЫЙ

www.medeurocompany.by



БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ВЯЗАНЫЙ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ:

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Накладывать на конечность согласно предложенным схемам или в соответствии с рекомендациями врача. Стирать руками при температуре воды не выше 35 °C с использованием мягких моющих средств, не тереть, не кипятить, не отбеливать и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла и солнечных лучей в расправленном виде. Не гладить утюгом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость сырья, местные заболевания кожи, выраженные нарушения артериального кровотока в конечности.

А. Техника наложения бинта на лучезапястный сустав.

1. На приподнятую руку накладывать бинт начиная с запястья, затем по диагонали по наружной стороне руки и покрыв бинтом ладонь, обратно до запястья.
2. Обернуть запястье, далее накладывать бинт через ладонь, затем вокруг наружной стороны руки обратно через ладонь и до запястья («восьмеркой»).
3. Повторяем движения согласно п. 1-2.
4. Сделать пару витков от запястья по руке вверх и закрепить бинт.

Б. Техника наложения бинта при варикозной болезни.

1. Полежать с поднятыми ногами 10-15 минут.
2. На приподнятую ногу накладывать бинт начиная с лодыжки, затем на стопу, голень и бедро (снизу вверх).
3. Давление бинта на поверхность ноги должно быть максимальным снизу и равномерно ослабевать кверху.
4. Последний виток накладывать выше пораженного участка не менее чем на 5 см.
5. Фиксировать бинт при помощи клипс.



Общий вид инструкции по применению Бинтов эластичных компрессионных

Индивидуальный предприниматель
ООО "МедЛабРус"

Перинат. З.С.

