

УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию

П.А.Свистаков

2021 г.



Маркировка индивидуальной упаковки

медицинского изделия

Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ

Масштаб 1:1

Размеры 100 x 120 мм



Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com

Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ

Регистрационное удостоверение №

№ партии

Дата изготовления

Основные параметры и характеристики:

- габаритные размеры, мм, не более: диаметр – 62, высота – 75;
- масса, не более 24 г;
- номинальная вместимость, не менее 125 мл;
- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;
- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень;
- температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от -50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;
- срок годности – 3 года с даты изготовления.

Правила эксплуатации:

- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;
 - извлечь контейнер из упаковки;
 - снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;
 - поместить биоматериал в стакан контейнера;
 - установить крышку, завинчивая ее по часовой стрелке до упора.
- Сведения о пациенте (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне, выполненной под шагрень, маркером.
- Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684 для отходов класса «Б».

Однократное применение
Для in vitro диагностики
НЕСТЕРИЛЬНО



PANTONE 355 C



Фон участка А - Белый

Штрих-код выполнить черным цветом на белом фоне

ОМ №29.1001.00


Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 2 листа(ов)


Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Свистаков П.А.

2021



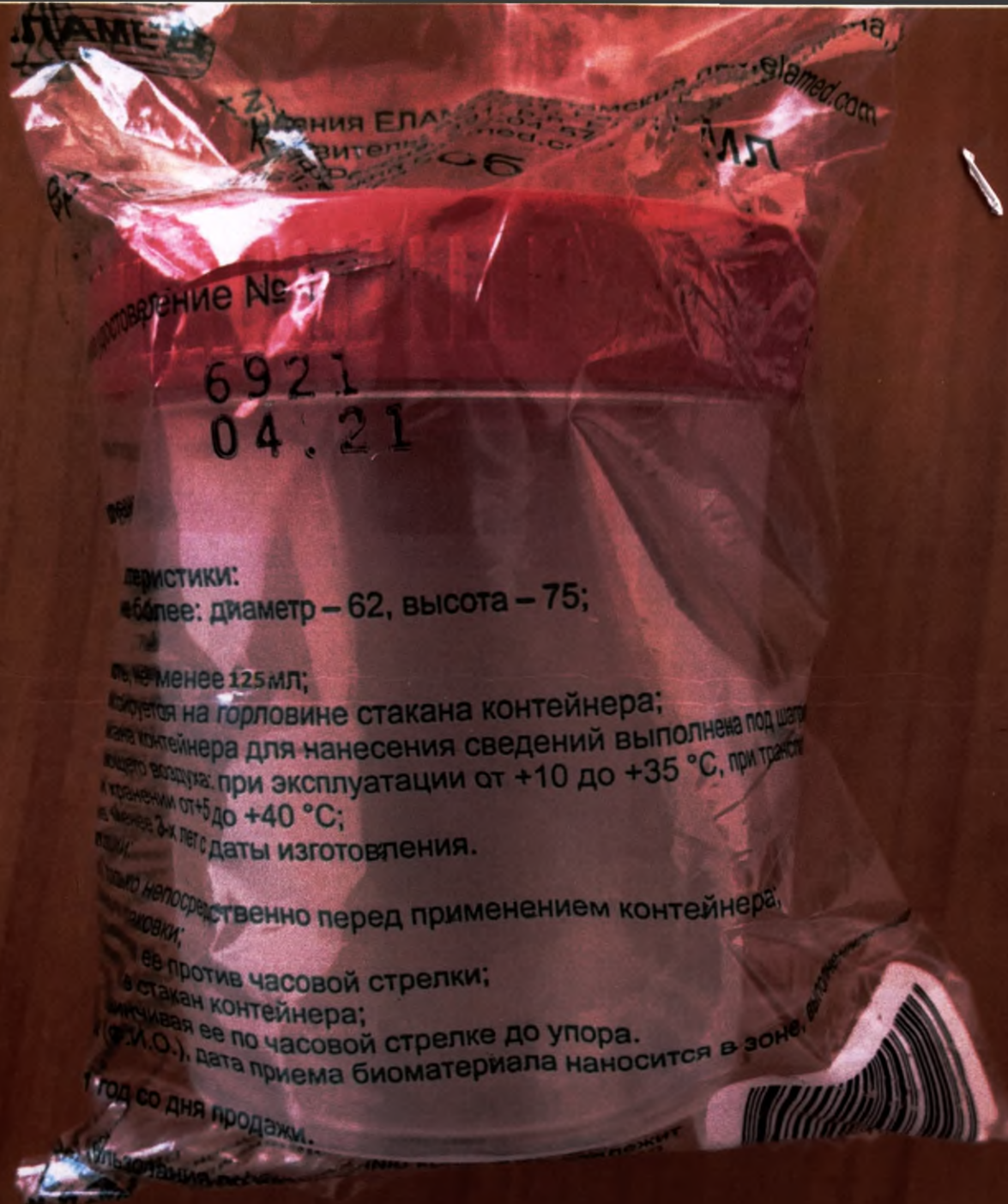

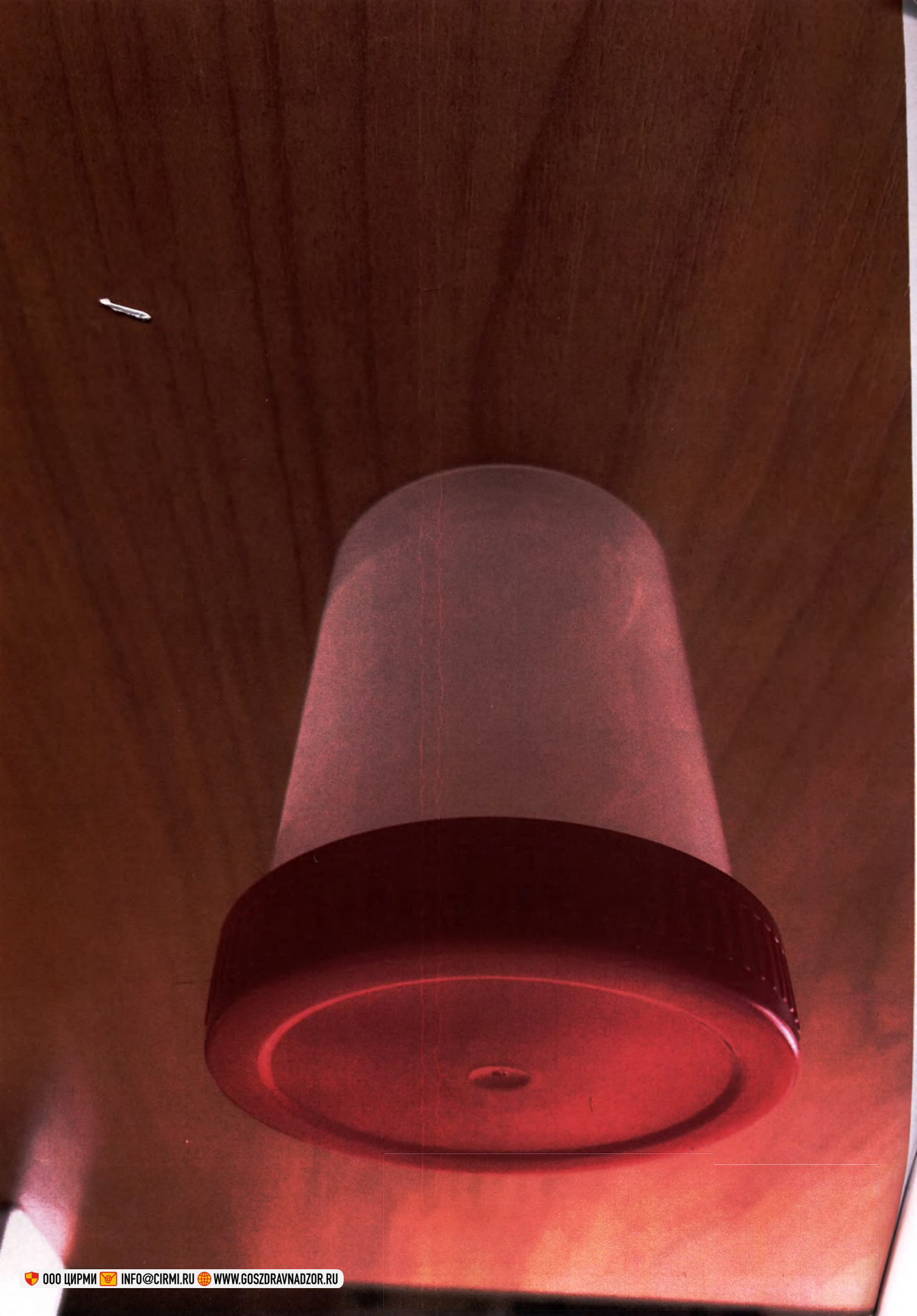



Директор по развитию АО «ЕПЗ

Свистаков П.А.

20 21



Масштаб 1:1

Размеры 100 x 120 мм



Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com Сайт: lpu.elamed.com

Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ

Руководство по эксплуатации

Регистрационное удостоверение №

№ партии

Дата изготовления

Основные параметры и характеристики:

- габаритные размеры (диаметр x высота), мм: контейнер – (60 x 69)±5; стакан – (57×69)±5; крышка – (60×13)±5.
- масса, г: контейнер – 11±5; стакан – 7±2,5; крышка – 4±2,5.
- номинальная вместимость, не менее 125 мл;
- крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера;
- поверхность зоны стакана контейнера для нанесения сведений выполнена под шагрень;
- температура окружающего воздуха: при эксплуатации от +10 до +35 °С, при транспортировке от -50 до +50 °С, при хранении от +5 до +40 °С;
- срок годности – 3 года со дня изготовления.

Правила эксплуатации:

- упаковку вскрыть только непосредственно перед применением контейнера;
 - извлечь контейнер из упаковки;
 - снять крышку, вывинчивая ее против часовой стрелки;
 - поместить биоматериал в стакан контейнера;
 - установить крышку, закручивая ее по часовой стрелке до упора.
- Сведения о пациентах (Ф.И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне, выполненной под шагрень, маркером.
- Гарантийный срок годности – 3 года со дня изготовления.

Утилизация: После использования по назначению контейнер подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса «Б».

Однократное применение
Для in vitro диагностики
НЕСТЕРИЛЬНО



PANTONE 355 C



Фон участка А - Белый

Штрих-код выполнить черным цветом на белом фоне



Подпись
22.08.2022

Утверждаю
Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод



Т.Н. Никитина
2022 г.

Макет транспортной упаковки
медицинского изделия
«Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ»



1014183
BIOLOGICAL



КОМПАНИЯ
ЕЛАМЕД

*Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»
Предприятие сертифицировано на соответствие ISO 13485



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Федеральной службой
по надзору в сфере
здравоохранения

Фрагмент транспортной упаковки
медицинского изделия
«Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ»



1014183
КОД ТОВАРА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИОПРОБ 125 мл
по ГИКС.942839.105 ТУ**



КОЛИЧЕСТВО _____ шт.

НОМЕР ПАРТИИ _____

ДАТА УПАКОВЫВАНИЯ _____

ШТАМП ОТК _____

СДЕЛАНО В РОССИИ



Компания ЕЛАМЕД*

**Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: lpu@elamed.com
Сайт компании: lpu.elamed.com**

***Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»**

Предприятие сертифицировано на соответствие ISO 13485


ОМ №29.1003.00

Фрагмент транспортной упаковки
медицинского изделия
«Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ»

1014183
КОД ТОВАРА



**КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИОПРОБ 125 мл
по ГИКС.942839.105 ТУ**

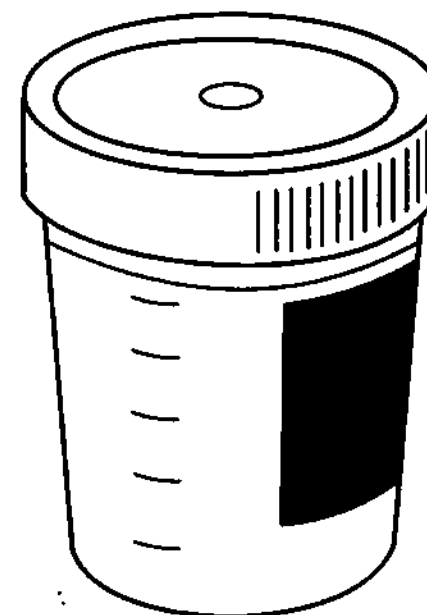

Фрагмент транспортной упаковки
медицинского изделия
«Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ»



Компания ЕЛАМЕД*

**Адрес: Россия, 391351, Рязанская область,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13**

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

***Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»**

Предприятие сертифицировано на соответствие ISO 13485

Фрагмент транспортной упаковки
медицинского изделия
«Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ»

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БИОПРОБ 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Федеральной службой
по надзору в сфере
здравоохранения



Фрагмент транспортной упаковки
медицинского изделия
«Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ»



НЕ НАСТУПАТЬ

скреплено печатью 7 листа(ов)

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Никитина Т.Н.

«22» 20 22



Утверждаю
Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод




Г.Н. Никитина
2022 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия
«Контейнер для биопроб 125 мл по ГИКС.942839.105 ТУ»**





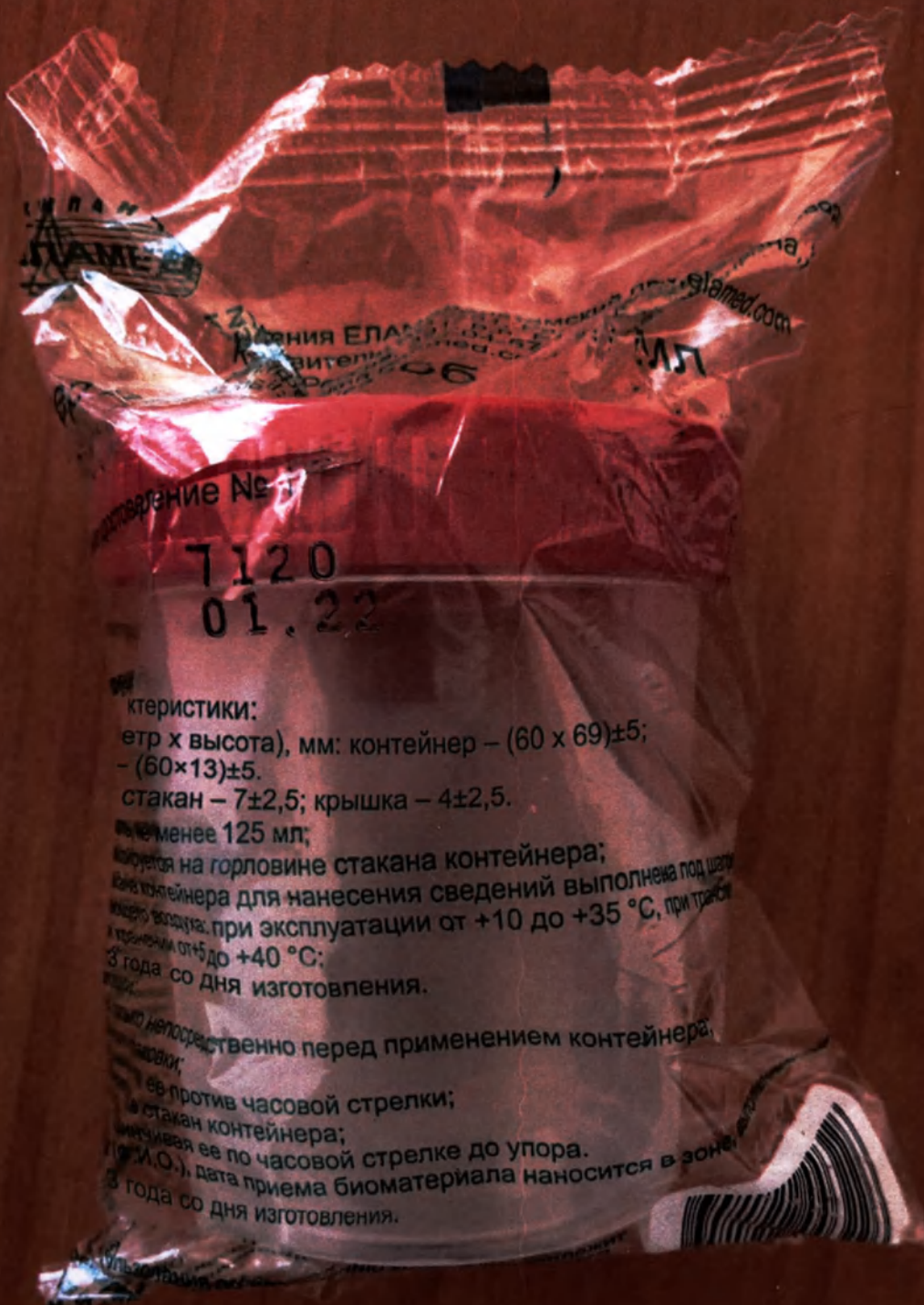

ПЛАСТИК

Заводская ЕПАС
Вител...
06

glamed.com

мл

Упаковка № 1

7120
01.22

Характеристики:
Диаметр х высота), мм: контейнер – $(60 \times 69) \pm 5$;
– $(60 \times 13) \pm 5$.
стакан – $7 \pm 2,5$; крышка – $4 \pm 2,5$.
Емкость не менее 125 мл;
Наносится на горловине стакана контейнера;
Контейнер для нанесения сведений выполнена под шприц;
Хранить в сухом месте при эксплуатации от $+10$ до $+35$ °C, при транспортировании от $+5$ до $+40$ °C;
Срок хранения 3 года со дня изготовления.
Использовать непосредственно перед применением контейнера;
Поворачивать;
Вращать ее против часовой стрелки;
Вращать стакан контейнера;
Вращая ее по часовой стрелке до упора.
(И.О.), дата приема биоматериала наносится в зоне;
3 года со дня изготовления.



скреплено печатью 4 листа(ов).

Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Никитина Т.Н.

2022

