

Генеральный директор ООО «Талан Медикал Индастри»



Д.Б. Арифалин


«19» октября 2021 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**  
**медицинского изделия**

Респираторы медицинские защитные одноразовые по ТУ ТМИН.18900218.004.ТУ, в вариантах  
исполнения, производства


Общества с ограниченной ответственностью «Талан Медикал Индастри», Россия

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Респиратор медицинский защитный одноразовый модели FFP2 NR.....            | 3  |
| 2. Респиратор медицинский защитный одноразовый модели FFP2 NR с клапаном..... | 4  |
| 3. Респиратор медицинский защитный одноразовый модели FFP3 NR.....            | 5  |
| 4. Респиратор медицинский защитный одноразовый модели FFP3 NR с клапаном..... | 6  |
| 5. Упаковка и маркировка.....                                                 | 7  |
| 6. Транспортная упаковка.....                                                 | 12 |
| 7. Инструкция по применению.....                                              | 13 |

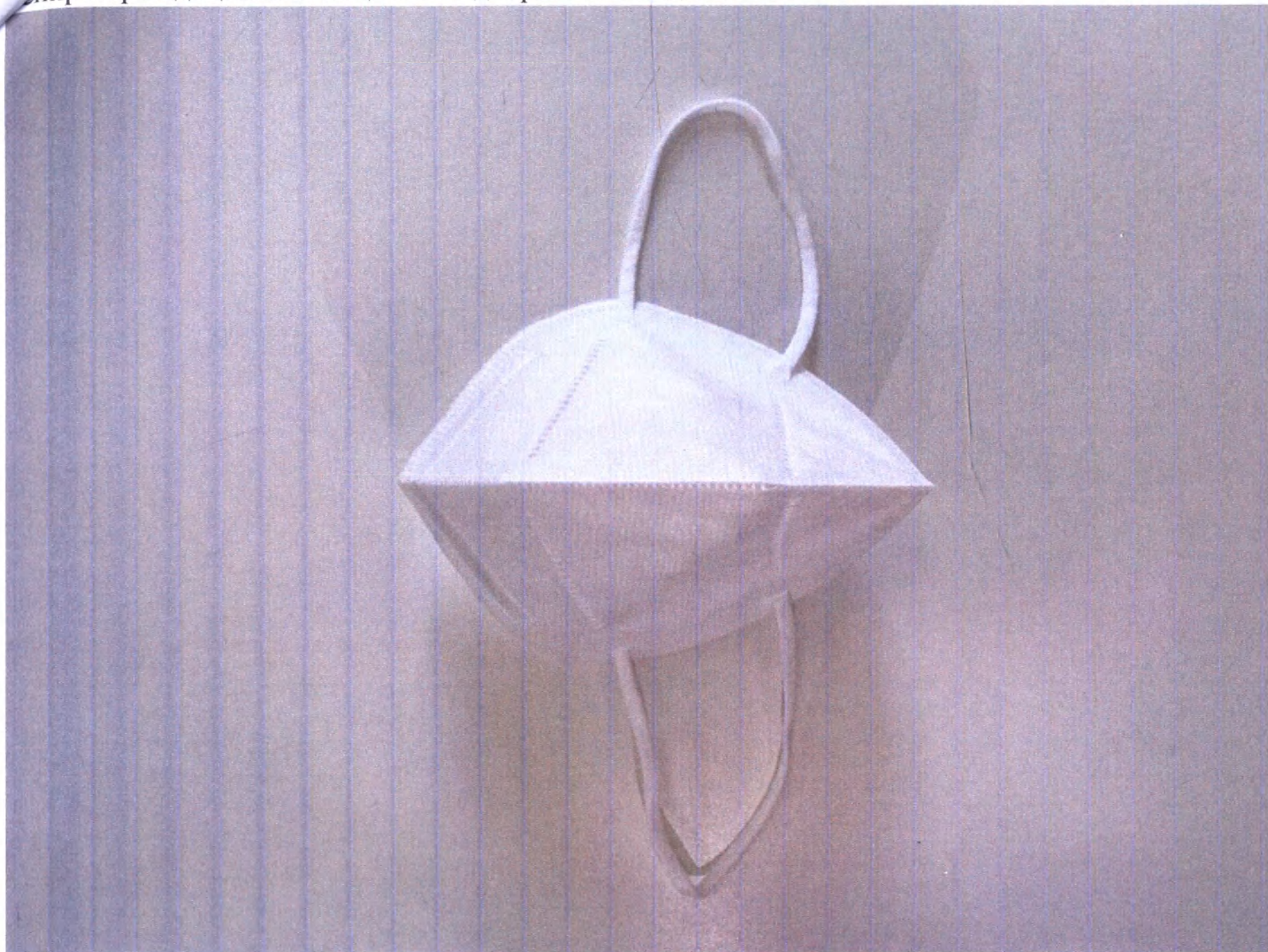

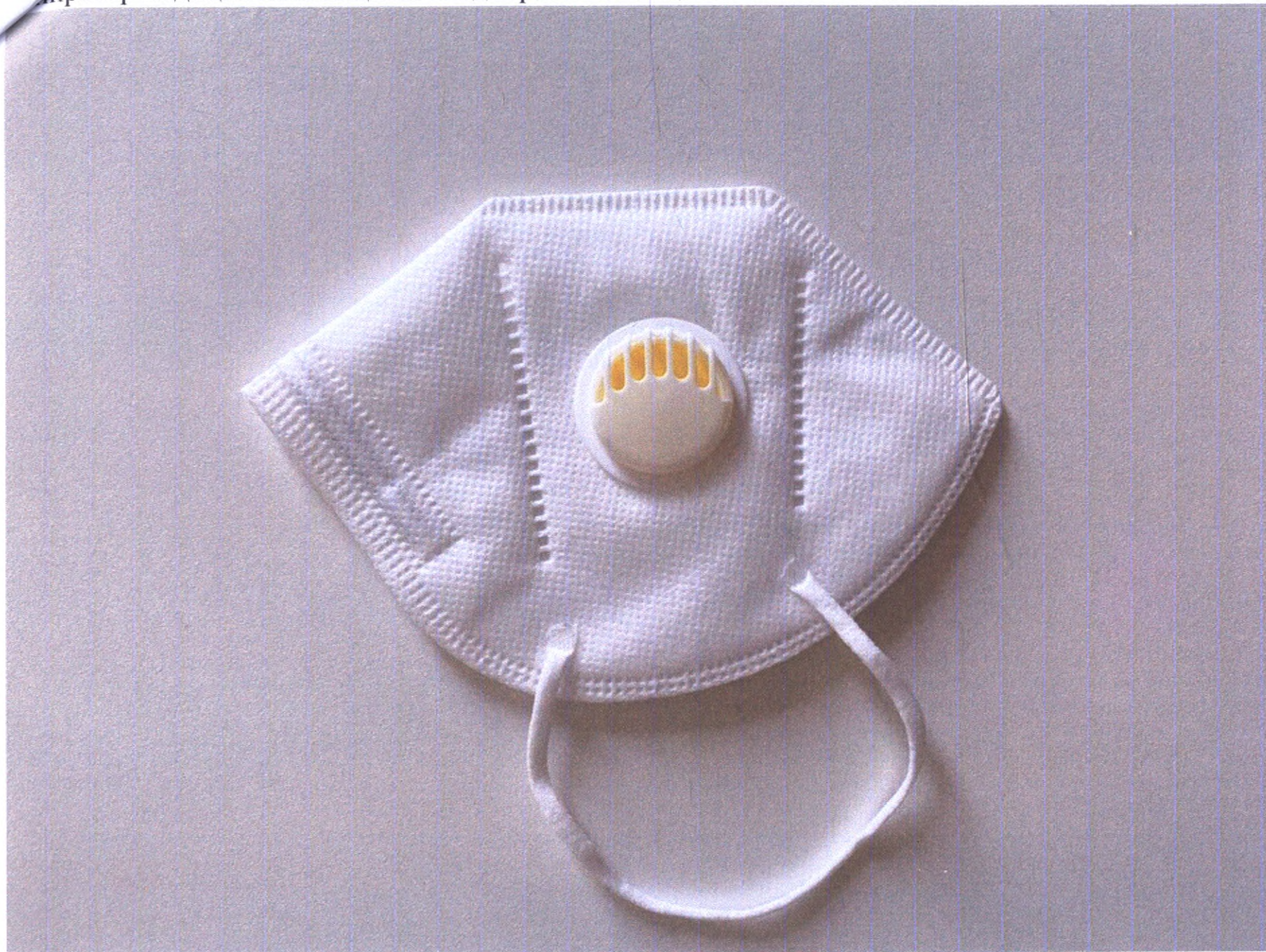




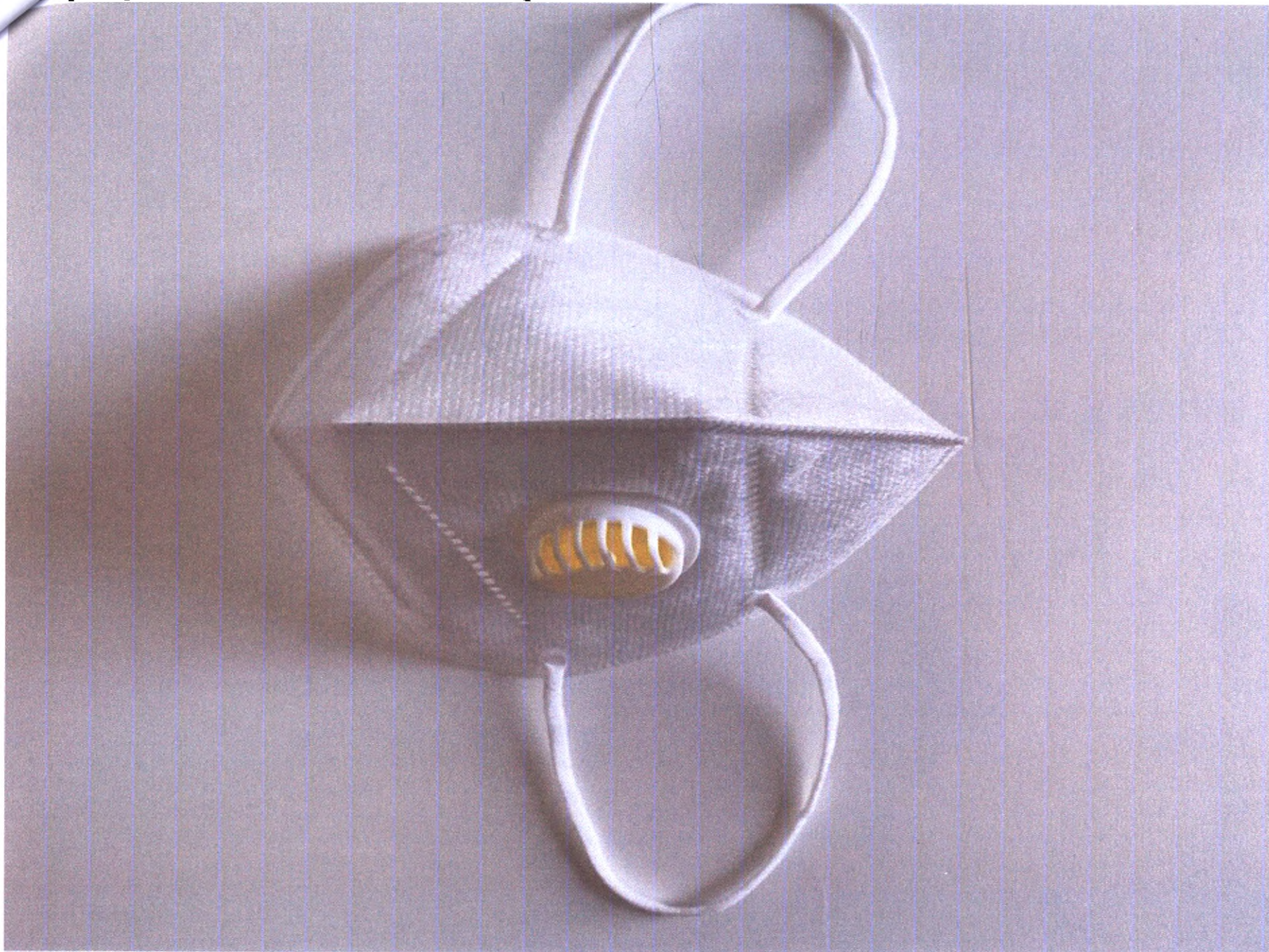



Респираторы медицинские защитные одноразовые

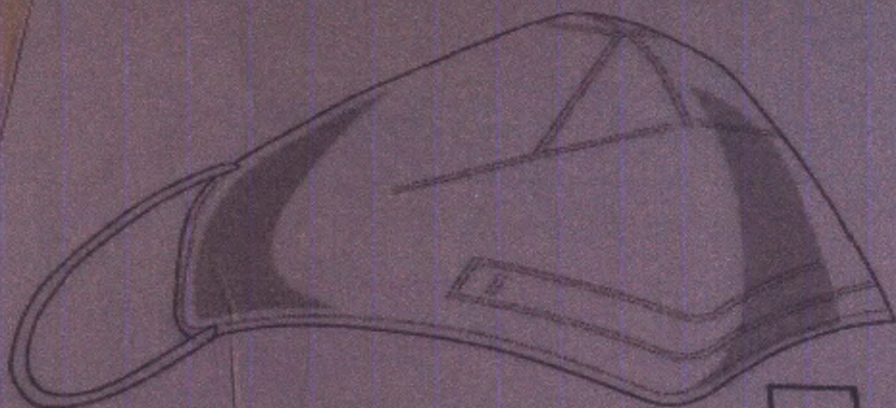

СДЕЛАНО В РОССИИ



FFP2 NR  
FFP3 NR

FFP2 NR  
FFP3 NR




FFP2 NR  
FFP3 NR



Респираторы медицинские защитные одноразовые

FFP2 NR  
FFP3 NR

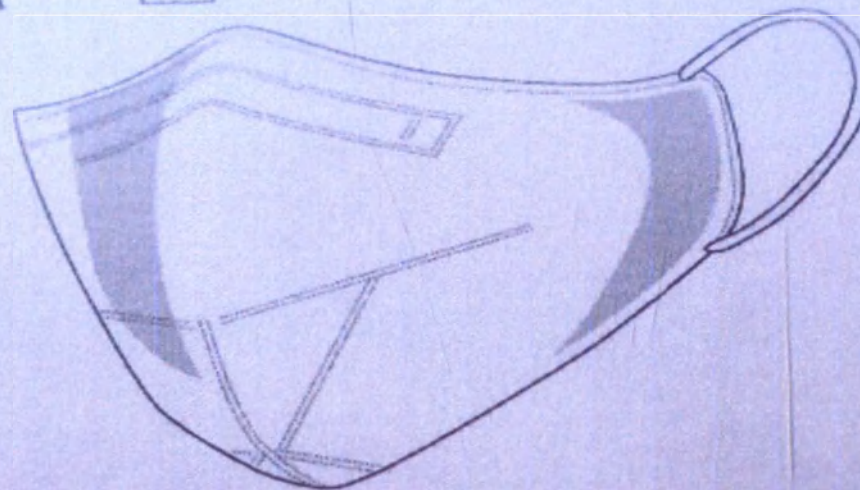

Респираторы медицинские защитные одноразовые

Респираторы медицинские защитные одноразовые  
модели NR ☐ без клапана ☐ с клапаном

Количество в упаковке: ☐ 10 шт. ☐ 20 шт.

Изготовлено по ТМНН.18900218.004.TU

Характеристики:

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Количество слоев материала                        | 5                             |
| Эффективность бактериальной фильтрации            | не менее 95 %                 |
| Дифференциальное давление                         | менее 29,4 Па/см <sup>2</sup> |
| Микробиологическая чистота                        | 30 и менее КОЕ/г              |
| Температура использования                         | от -10 до +25° С              |
| Относительная влажность воздуха при использовании | не более 90 %                 |

Производитель: ООО «Цирми», Москва, Истринский район, пос. Пески, д. 17/260, телефон 8807, e-mail: info@cirmi.ru



Номер партии / Годен до:

Результаты лабораторных исследований




Производитель:  
ООО «ТАЛАН МЕДИКАЛ  
ИНДАСТРИ»  
Юр. адрес:  
119421, г. Москва, ул.  
Новаторов д.7А, кор.2,  
пом. 42  
Адрес места производства:  
171260, Тверская область,  
Конаковский район,  
пгт. Редкино,  
ул. Промышленная,  
д. 6А

# РЕСПИРАТОР МЕДИЦИНСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

Модель FFP2 NR

ТМИН.18900218.004.TY

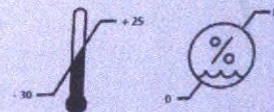

- Беречь от попадания прямых солнечных лучей.
- Располагать на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Количество потребительских  
(групповых) упаковок: 24 шт.  
Партия №: О-001  
Упаковано: 08.2021г.  
Годен до: 08.2026г.  
Масса брутто:

№ РЭН

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять респираторы при работах с токсичными, взрывчатыми и радиоактивными веществами, а также с химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом респиратора.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять в небезопасной близости с открытым огнем, сильно нагреваемыми и раскаленными предметами.

**ВНИМАНИЕ:** перед тем, как вать респиратор в руки, тщательно вымойте руки водой с мылом, или обработайте антисептиком.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Респираторы предназначены для ограничения передачи инфекционных агентов от зараженных пациентов в медицинских учреждениях, для обеспечения подопытных животных, лабораторных животных, персонала, контактирующего с инфекционными болезнями в медицинских организациях в качестве биологического средства, в том числе для снижения риска распространения инфекции, особенно при аэрозольных и контактных.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** истощение, срок годности, механические повреждения респиратора, индивидуальная чувствительность (аллергическая реакция) на материал изделия. Респираторы не предназначены для использования в операционных

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вымыть или обработать антисептиком руки.

2. Вать респиратор в руки и осматривать его: запрещается применять респиратор, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия, в том числе поврежденные (надорванные) ушные петли, или с истекшим сроком годности.

3. Приложить респиратор к лицу, зафиксировать ушные петли за уши, проверить плотное прилегание респиратора к лицу (плотное закрытие носа и рта).

**ВНИМАНИЕ:** старайтесь не касаться руками надетого респиратора.

4. Ресурс непрерывного использования респиратора с клапаном — не более 8 часов. Ресурс непрерывного использования респиратора без клапана — не более 0 часов.

5. При значительном загрязнении или повреждении во время использования, а также, если респиратор стал мокрым и / или дышать через респиратор затруднено, респиратор подлежит замене до истечения указанного срока / часов.

6. Снятие респиратора производится в следующем порядке: вынуть или обработать антисептиком руки, держа респиратор односторонне снять ушные петли с ушей, держа респиратор за ушные петли, отвести его от лица, перевернуть ладонь руки за обе ушные петли, опустить респиратор в утилизирующую емкость, держа его одной рукой за ушные петли.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** если вы используете самого респиратора во время снятия, тщательно вымойте руки водой с мылом или обработайте антисептиком.

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 13 лист (ов)

Д.Б. Арифупин

