

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «РАФЭЛ»

Мухаметзянов А.Р.

«09» ноября 2023 г.

М.П.



**МАКЕТЫ МАРКИРОВОК
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®,
SANAMEDICAL®**

(редакция 2)

Производитель: CHIFENG TIANBO MEDICAL
DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic
Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng,
Inner Mongolia, China

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD2Y-130
 СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
 ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ СХВАТ КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0,8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Сторона 2

LOT MMYYXX

MMYYMM

YYMM

YYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАНЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛАТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИЛЯ. ВВЕДИТЕ ШПИЛЬ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ЦЕЛЛЮЛ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «LAUER» / «LAUER-LOK»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhonggong Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №:

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-140»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD2Y-140

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ **!**

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ



SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT: MMYYUXXX
 YYYUUMM
 YYYUUMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИ. ВВЕДИТЕ ШПИЛ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «АУЕР» / «АУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-150»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD2Y-150

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0,8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0,8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

SALUVIT

STERILE EO

Сторона 2

LOT: MMYYUXX
 YYYUXX
 YYYUXX
 YYYUXX

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛУЕР» / «ЛУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG LIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China
ИМПОРТЕР:
 РУ №:

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD2Y-160

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

!

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

← **ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ**

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYUXXX

MMYYMM

YYUXXX

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВОСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИ. ВВЕДИТЕ ШПИ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАЛИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «АУЕР» / «АУЕР-АОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
Р/У №:

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-130»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD3L-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYYYXX
 YYYYYMM
 YYYYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШЛАПА, ВВЕДИТЕ ШЛИНГ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «АУЕР» / «АУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-130»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®

JD3L-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)


СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ.

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНШЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм.
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА.
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЗАЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ.

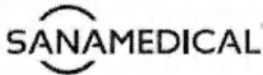





STERILE EO

Сторона 2

LOT: MMYYUUYUXX
 YUYUUMM
 YUYUUMM
 YUYUUMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО.
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛАВНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО.
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ.
- СНИМИТЕ КОЛАПСОК С ШИПОВ, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ.
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВ.
- ПЛАВНО СОБИРАЙТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ КЛАПЕР / КЛАПЕР-ЛОЖУ.
- СДАВЛИВАЙТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА.
- ОТКРОЙТЕ ЗАГАУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКОЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ).
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА.
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ.
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА.
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСепТИКОМ.
- СНИМИТЕ КОЛАПСОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ.
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ЗАЛИВАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHENG BANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD. Zhongxing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024250 Chengde, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
Р/у № Р.ЭН 2022/18016 от

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-140»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD3L-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ СКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYYYXX
 YYYYYMM
 YYYYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАНЫТЕ УСТРОЙСТВО.
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПЛА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОЖУСКОМ «ЛАУЕР» / «ЛАУЕР-АОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-140»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®

JD3L-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ **!**

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПЛИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0,8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ БЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ







STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYYYXX
 YYYUUMM
 YYYUUMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВОСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛАПАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛУЕР» / «ЛУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГАЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯНЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛАПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ БЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
Р/У № Р 314 2022, 19015 от

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-150»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD3L-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВЕДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT: MMYYXX
 YYYMM
 YYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАНЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПЛА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛУЕР» / «ЛУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГАЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
ру №:

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-150»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
JD3L-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
 ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
 И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
 НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ







STERILE EO

Сторона 2

LOT MM YYY YXX

mm yyy ymm

mm yyy ymm

mm yyy ymm

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИТА, ВВЕДИТЕ ШИТ НА ВОЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «AVER» / «AVER-AOK»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАПУСК ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВНЕПУНЖИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВНЕПУНЖИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
 Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
 РУ № РЗН 2022/18016-01

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-160»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD3L-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ.

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +3°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ



SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT: MMYYYYXX
 YYYYYMM
 YYYYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОИТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНЯМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШПИЛ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «АУЕР» / «АУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУЗКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНЯМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №:

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
JD3L-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНШЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ БАМБАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYUXXX

MMYYMM

UXXXMM

UXXXMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПТА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛАВЕР» / «ЛАВЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВНЕПЛУНЧИКА АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНТУРИЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ БАМБАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHENGSHI BANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chengde, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
RU № P 34 2022/18016 от

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD3Y-130
 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
 Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

• ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм

• СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА

• СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЗАЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Сторона 2

LOT MMYYXX

MMYYMM

YYMMYY

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛАУЕР» / «ЛАУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ЗАЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongqing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
Рунь

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-130»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3Y-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ



ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 8 В ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЗАЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYUXXX
 YYYUUMM
 YYYUUMM
 YYYUUMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСЕРОВНЕ УПАКОВКУ И ДОСТАНЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПТА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛУЕР» / «ЛУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГАЛУЗКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ЗАЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBU MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongling Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ № РЗН 2022/18016-01

15

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-140»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD3Y-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
 Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21 G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21 G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
 И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
 НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ



SALUVIT





STERILE EO

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Сторона 2

LOT MMYYXX

MMYYMM

YYMMYY

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВОЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «AUER» / «AUER-LOCK»
- СДАВЬТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКАЯНЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
 Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
 РУ №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JDZY-140»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®

JDZY-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЕ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНИ ПРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ БЛИЖАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ







STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYUXXX
 YYYUXXX
 YYYUXXX
 YYYUXXX

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛАДНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫАКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИ. ВВЕДИТЕ ШПИ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «АУЕР» / «АУЕР-АДЖИ»
- СДВИЖАЙТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯНЫМИ БУТЫАКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ БЛИЖАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
ПУ № РЭН 2022/18016 от

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-150»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD3Y-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ



SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYXX
 YYYMM
 YYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «AUER» / «AUER-ЛОЖ»
- СДАВЛИВАЙТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD. Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024300 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-150»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®

JD3Y-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)


СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ СКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАЛВУЛИНГА, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

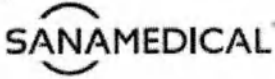





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYXX
 YYYMM
 YYYMM
 YYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИ. ВВЕДИТЕ ШПИ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАБЛЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛУЕР» / «ЛУЕР-ЛОК»
- СДВИЖАЯ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯНЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАЛВУЛИНГА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG HANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ № РЗН 2022/1801/6 от

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JDZY-160»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JDZY-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21 G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21 G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ **!**

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ



SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT: MMYYXX
 YYYMM
 YYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАНЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИЛЯ, ВВЕДИТЕ ШПИЛЬ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПРОВЕРЬТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «AUER» / «AUER-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКАЯНЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
Рy №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®

JD3Y-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАЛИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНФЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ.

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНШЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 6 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПОДЪЕМОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАМПАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

SANAMEDICAL®

STERILE EO

Сторона 2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛАНОНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ БУТЫЛКУ (ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНЯМИТЕ КОМПАРТОК С ЦИПКА, ВВЕДИТЕ ЦИП НА ВОЮ ДАННУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛАНОНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИЛИ ДРУГУЮ ГОЛОВКАТ С КОНУСОМ ВАУЗЕР / ВАУЕР-ЛОК
- СДАВИТЕ ХАТЧЕЛНУЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДОТОВАДОВИРНОГО ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАПЕЧАТКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНЯМИТЕ КОМПАРТОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongfeng Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ № РЗН 2022/18015-01

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-130»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD3YL-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ. ОСОБЕННО В КОНЦЕ.
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYUXXX
 YYYUUMM
 YYYUUMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИЛЯ, ВВЕДИТЕ ШПИЛЬ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «АУЕР» / «АУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУШОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-130»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®

JD3YL-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ (КОЛО) КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЕ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ









STERILE EO

Сторона 2

LOT XXXXXXXX
 YYYYYY
 YYYYYY
 YYYYYY
 YYYYYY

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПТА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВОЗДУШНУЮ ЕМКОСТЬ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С «КОНИКОМ ЗАПЕРА» / «ЛУВЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHENG HANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongling Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ № РЗН 2022/18016 от

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-140»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD3YL-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЗАЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT: MMYYXXXX
 MYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «КАУЕР» / «КАУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ЗАЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD. Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №:

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-140»

Сторона 1

**СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
ID3YL-140**

КАТЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У. ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 mm)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАЛЕБЫНИШЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0,8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАКУИРОВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ



STERILE	EO
---------	----

Сторона 2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВЕРСИЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПЛА. ВВЕДИТЕ ШПЛ НА ВСЮ ГЛУБИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «МУЖЬ» / «МУЖЬ-ЛОЖ»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАЛИДИНАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

IMPORTER:

PHY 381 PH 2022-2023

XXXXXX

MINIAXX [m]

XXXXXX

LOT

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-150»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD3YL-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ **!**

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYYYXX
 YYYYYMM
 YYYYYMM
 YYYYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИГА, ВВЕДИТЕ ШПИГ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «AUER» / «AUER-LOK»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHIFENG TANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongling Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District (24200) Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-150»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
JD3YL-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ





STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYYYXX

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО, ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИЛЯ, ВВЕДИТЕ ШПИЛЬ НА ВОЮ ДАЛЛЕ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНИКОМ «AUFER» / «AUFLAUF»
- СДАВНИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHIRENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhonggang Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024205 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ № РЗН 2022/18016 от

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-160»

Сторона 1

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD3YL-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ







STERILE EO

Сторона 2

LOT MMYYYYXX
 YYYYYMM
 YYYYYMM

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАНЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПРОВЕРЬТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «AУЕР» / «AУЕР-АОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГАУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
Р/У №

- Макет маркировки индивидуальной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®

ID3YL-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ **!**

i ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАСТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 мм
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


 (No fire)


 (Warning)


 (No open flame)

STERILE EO

Сторона 2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ОТКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИПА. ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «КАУЧЕР» / «КАУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАПЯТКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- ВВЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАЛВАЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG BANGBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
Р/У № РЭИ 2022/18016 от

- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-130»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-140»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-150»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-160»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-130»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-130»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-140»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-140»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-150»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-150»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-160»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-160»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-130»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-130»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-140»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-140»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-150»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-150»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-160»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-160»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-130»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-130»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-140»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-140»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-150»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-150»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-160»



- Макет маркировки групповой упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-160»



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD2Y-130

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНАРУЖИ, АБСОЛЮТНО НЕПОСРЕДСТВЕННО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЬШЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG Technology APPLICAI DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Chifeng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ.Н.

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

№ / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

В / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-140»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD2Y-140

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Chengde City, 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУС

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☑ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

В / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-150»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD2Y-150

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ №



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

📅 / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYYX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD2Y-160

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +47°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG DANKU MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Huolunhuo District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

XXXX

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

В / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3L-130

КАПЕЛЬНО ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОПЛОТЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0,8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИКЕЛЬНО НЕПЛОМБОВАННО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -5°C ДО +43°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjin Industrial Park,
Economic Development Area, Chifeng City 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РФ

!

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☑ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

В / ГОДЕН ДО: YYYYMM

☐ / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3L-130 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм) СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм) SANAMEDICAL® ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China ИМПОРТЕР: РУ № РЗН 2022/18016 от  STERILE EO
--

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX CM	
		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-140»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3L-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

Р/У №



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

☞ / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-140»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
JD3L-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

SANAMEDICAL®

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ № РЗН 2022/18016 от



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: _____ XX _____ ШТУК

 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ YYYYMM _____

 / ГОДЕН ДО: _____ YYYYMM _____

 / ПАРТИЯ №: _____ MMYYYYYX _____

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ XX _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ XX _____ КГ


РАЗМЕРЫ КОР.: _____ XX x XX x XX _____ СМ









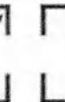

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-150»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3L-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ АЛЮМИНОВОГО ПЕТЛОКОНУСНОГО ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningqiang District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

Р/У N.

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

В / ГОДЕН ДО: YYYYMM

☞ / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-150»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3L-150 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм) СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм) SANAMEDICAL® ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China ИМПОРТЕР: РУ № РЗН 2022/16016 от STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
📅 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX	СМ
🌡️ 🍷 🏠☀️ ☂️ 📦5		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3L-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3L-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНШЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHENG RANSO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Kepingcheng District 024200 Chengde, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

P.L.N.

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

Ⓜ / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM




- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3L-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3L-160 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм) СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм) SANAMEDICAL® ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China ИМПОРТЕР: РУ № РЗН 2022/18016 от  STERILE EO

Сторона 2

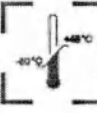QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
📅 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX CM	
    		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3Y-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjiao Industrial Park,
Economic Development Area, Ningbo City District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

г. у. п.

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

DATE / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

EXP / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
JD3Y-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
 Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
 РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

SANAMEDICAL®

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
 НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
 ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
 Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
 РУ № РЗН 2022/18016 от



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: _____ XX _____ ШТУК

 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ YYYYMM

 / ГОДЕН ДО: _____ YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: _____ MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ XX _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ XX _____ КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ XX x XX x XX _____ CM











- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JDZY-140»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JDZY-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG BANQI MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningqizhong District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РФ, г.г.

!

STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☑ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

В / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM




- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-140»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3Y-140 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм) СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм) SANAMEDICAL® ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China ИМПОРТЕР: РУ № РЗН 2022/18016 от STERILE EO
--

Сторона 2

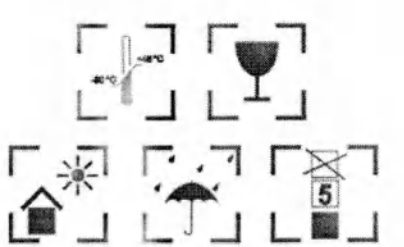QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
📅 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX CM	
		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-150»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3Y-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ №



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

☞ / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM




- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3Y-150»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3Y-150 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм) СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм) SANAMEDICAL® ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China ИМПОРТЕР: РУ № РЗН 2022/18016 от STERILE EQ
--

Сторона 2

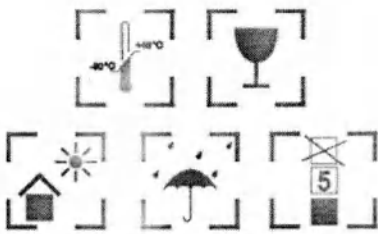QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
📅 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX CM	
		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3Y-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3Y-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ №



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

☞ / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JDZY-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JDZY-160	
КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)	
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)	
	
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China	
ИМПОРТЕР: РУ № РЗН 2022/18016 от	
	STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX	СМ
    		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3YL-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ №



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

☞ / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM




- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-130»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3YL-130
КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China
ИМПОРТЕР: РУ № РЗН 2022/18016 от
 STERILE EO

Сторона 2

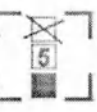QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
☞ / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX	СМ
    		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-140»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3YL-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21 G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21 G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ №



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

M / ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

B / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-140»

Сторона 1

**СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
JD3YL-140**

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Υ-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

SANAMEDICAL®

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
РУ № РЗН.2022/18016 от



STERILE
EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: _____ XX _____ ШТУК

 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ YYYYMM

 / ГОДЕН ДО: _____ YYYYMM

 / ПАРТИЯ №: _____ MMYYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ XX _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ XX _____ КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ XX x XX x XX _____ CM











- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-150»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3YL-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАСТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ №:



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

☞ / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

📅 / ГОДЕН ДО: YYYYMM

📦 / ПАРТИЯ №: MMYYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-150»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3YL-150 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА, Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм) СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм) SANAMEDICAL® ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80% НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China ИМПОРТЕР: РУ № РЭН 2022/18316 от  STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО:	XX	ШТУК
📅 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ:	YYYYMM	
📅 / ГОДЕН ДО:	YYYYMM	
📦 / ПАРТИЯ №:	MMYYYYXX	
GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО:	XX	КГ
NET WEIGHT / НЕТО:	XX	КГ
РАЗМЕРЫ КОР.:	XX x XX x XX	CM
		

- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD3YL-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT® JD3YL-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНЕШН. АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)



SALUVIT

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАСТОЯНИИ НЕ МЕНЬШЕ 1 м ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHENG TIANBO MEDICAL DEVICES CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 047300 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:

РУ-18



STERILE EO

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: XX ШТУК

M / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: YYYYMM

E / ГОДЕН ДО: YYYYMM

LOT / ПАРТИЯ №: MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: XX КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: XX КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: XX x XX x XX CM



- Макет маркировки транспортной упаковки «Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®: JD3YL-160»

Сторона 1

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
JD3YL-160

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЧЕТО-СОВМЕЩЕНЫЙ НАСОС, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
 УПЛОТНЕННЫЙ УЧЕТО-ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНОЕ ВЕЩНО, АЛИРОГЕННО-НЕТОКСИЧНО-ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
 РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

SANAMEDICAL®

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
 НА РАВНОСТОЯНИИ НЕ МЕНШЕ 1 М ОТ СТОПНИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
 ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -30°C ДО +45°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
 Economic Development Area, Ningmeng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР:
 РУ № РЗН 2022/00116.01

Сторона 2

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: _____ XX _____ ШТУК

 / DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____ YYYYMM


 / ГОДЕН ДО: _____ YYYYMM

 / ПАРТИЯ №: _____ MMYYYYXX

GROSS WEIGHT / ВЕС БРУТТО: _____ XX _____ КГ

NET WEIGHT / НЕТТО: _____ XX _____ КГ

РАЗМЕРЫ КОР.: _____ XX x XX x XX _____ CM

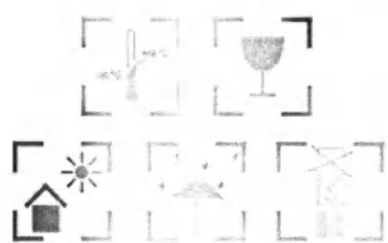

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
71 (Семьдесят один) ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР

МУХАМЕТЗЯНОВ А.Р.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «РАФЭЛ»

Мухаметзянов А.Р.

«17» ноября 2023 г.

М.П.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®,
SANAMEDICAL®

(Редакция 2)

Производитель: CHIFENG TIANBO MEDICAL
DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District
024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

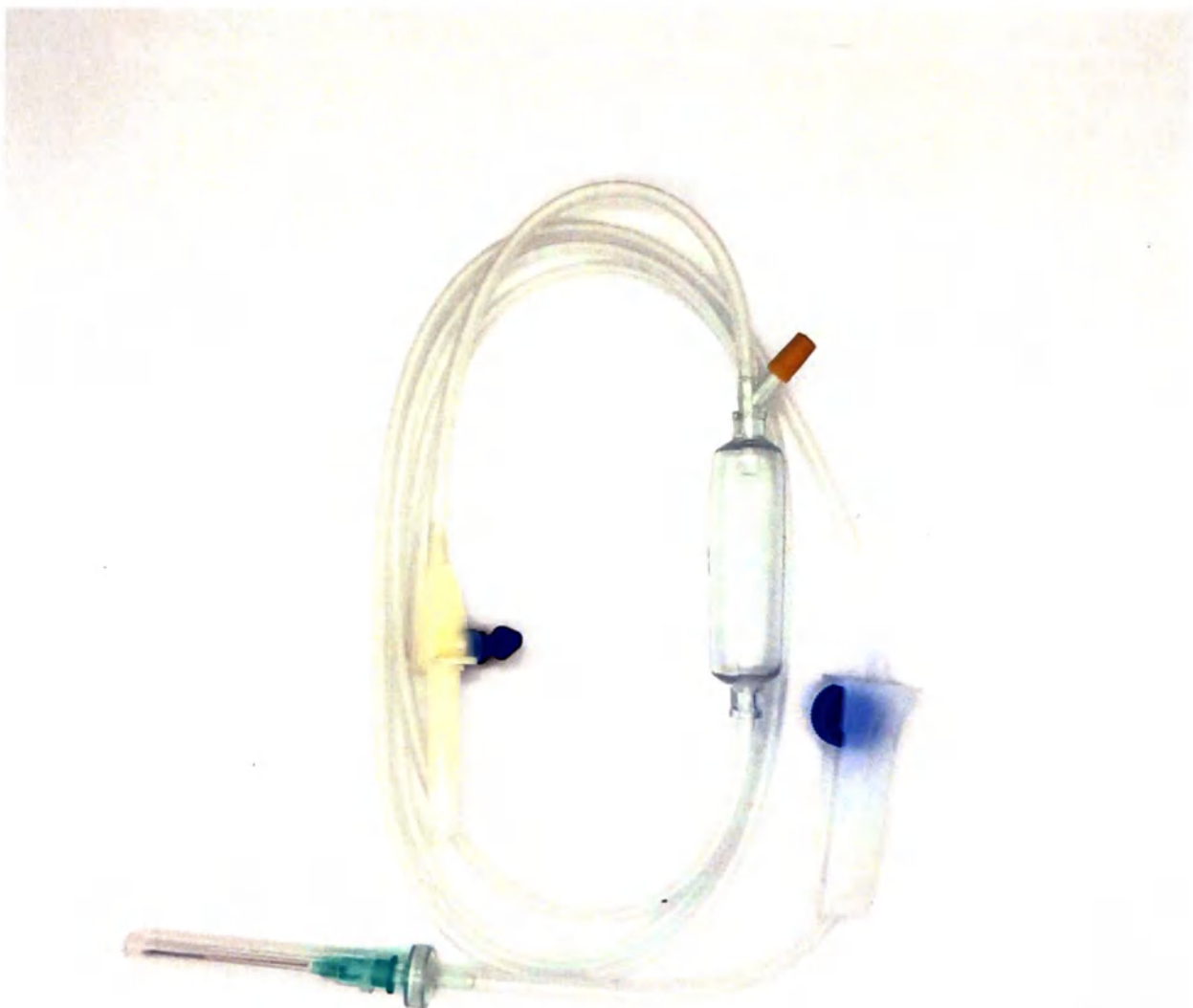


Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-XXX (совмещенная игла, капельно-инъекционный узел, магистраль, регулятор скорости потока, фильтрующий узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

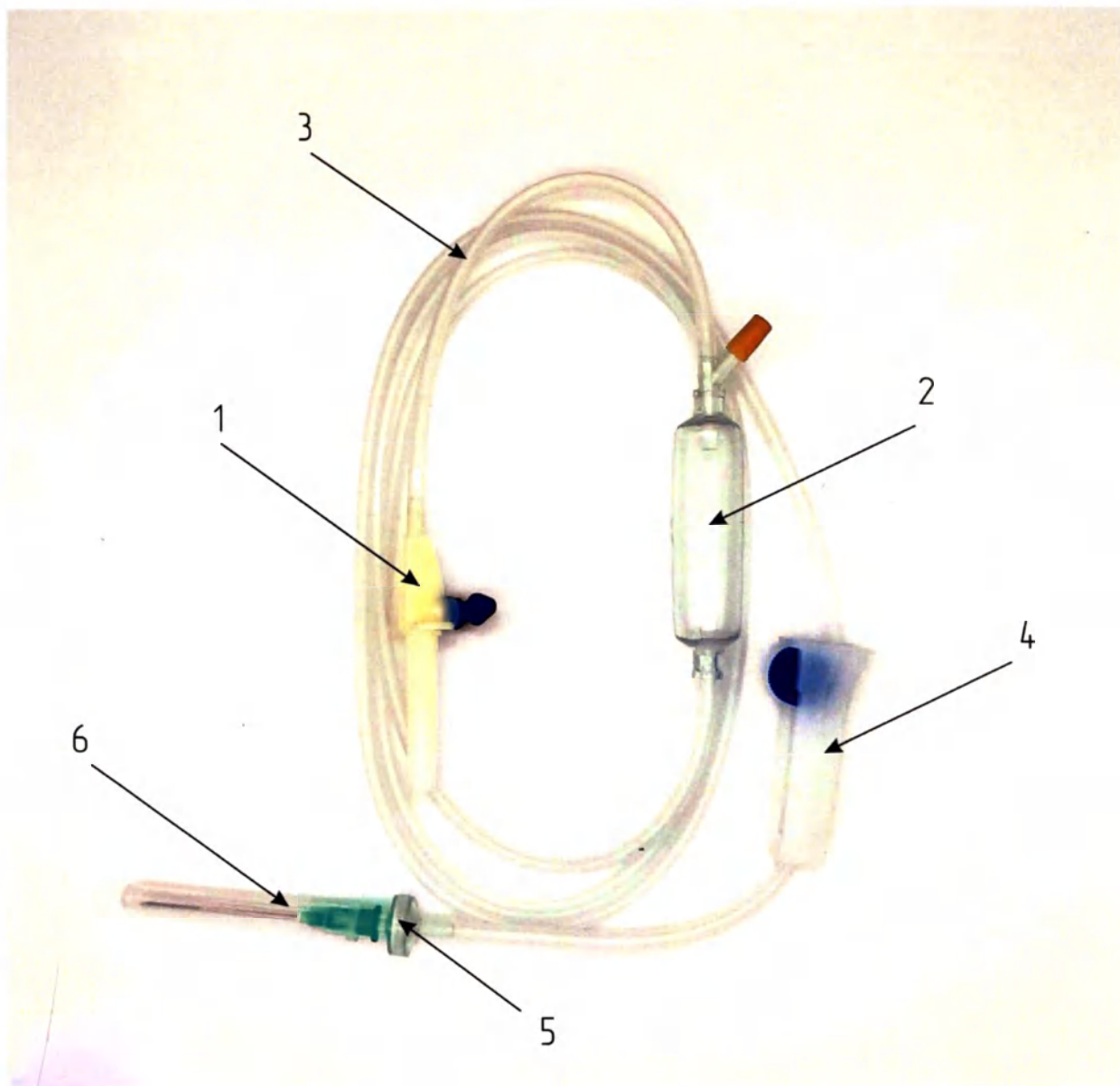


1 - совмещенная игла, 2 - капельно-инъекционный узел, 3 - магистраль,
4 - регулятор скорости потока, 5 - фильтрующий узел,
6 - инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм)

Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®: JD2Y-XXX
(совмещенная игла, капельно-инъекционный узел, магистраль, регулятор скорости потока,
фильтрующий узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

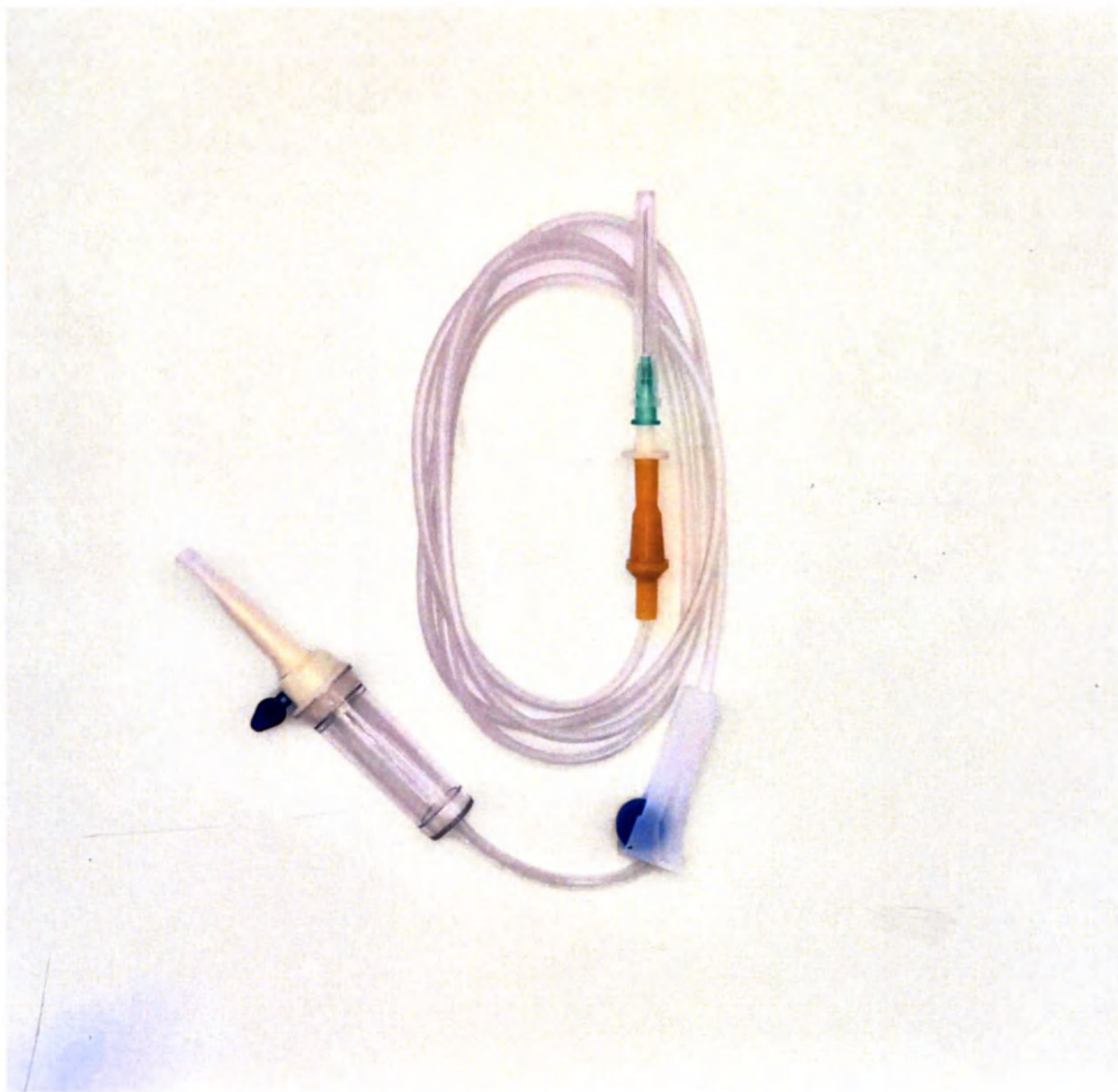

Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®: JD3L-XXX (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

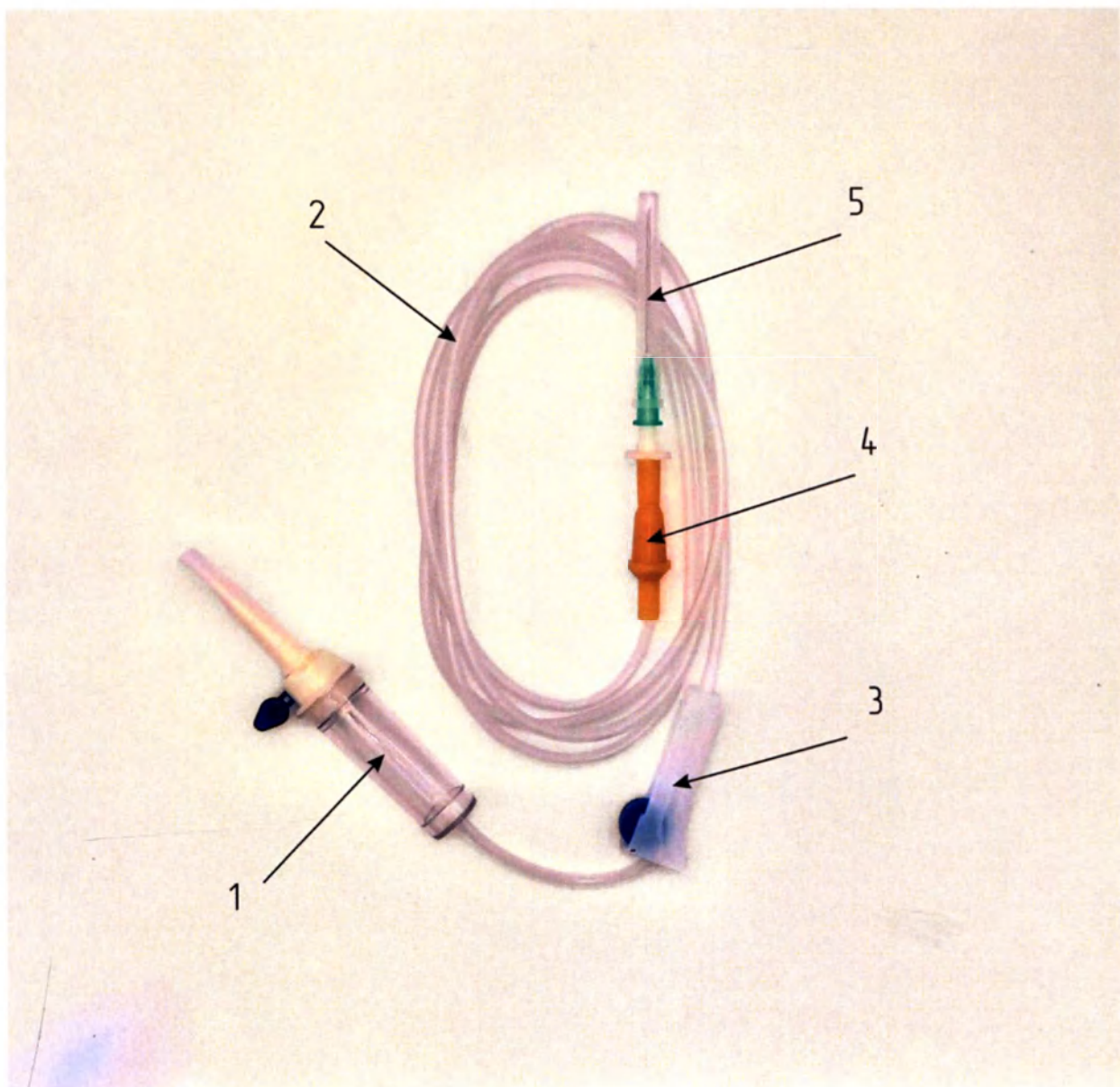


- 1 – капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, 2 – магистраль,
 3 – регулятор скорости потока, 4 – инъекционный узел,
 5 – инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм)

Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®:
 JD3L-XXX (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости
 потока, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))




Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®:
JD3Y-XXX (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости
потока, Y-порт, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

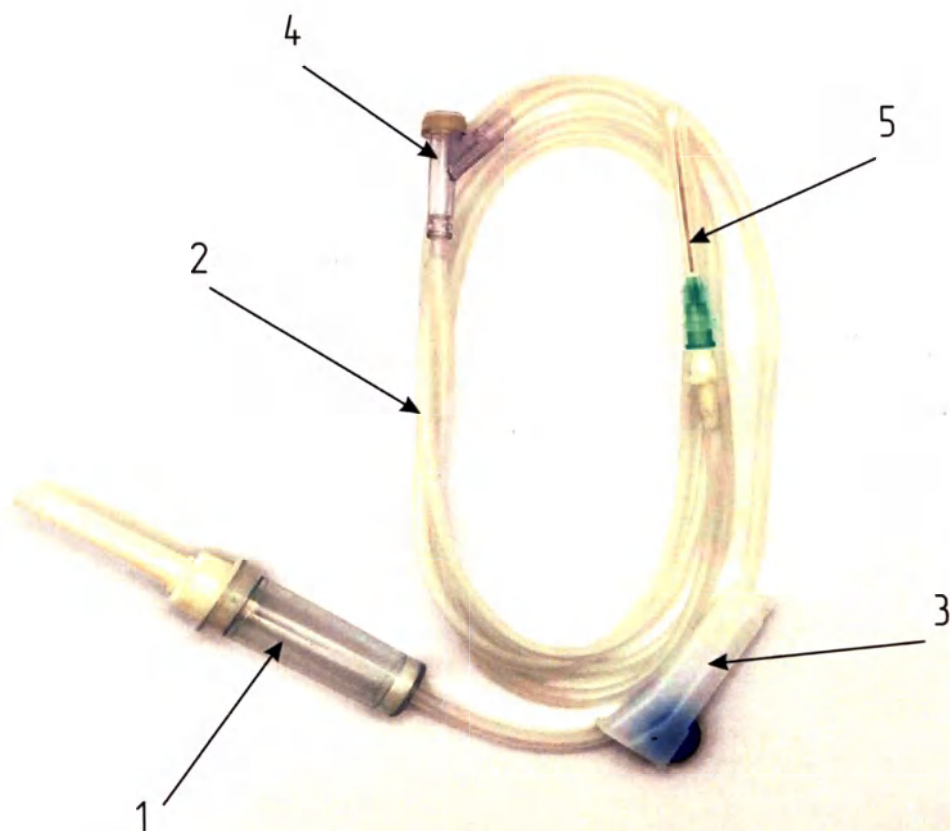


1 – капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, 2 – магистраль,
 3 – регулятор скорости потока,
 4 – Y-порт, 5 – инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм)

Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®:
 JD3Y-XXX (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости
 потока, Y-порт, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

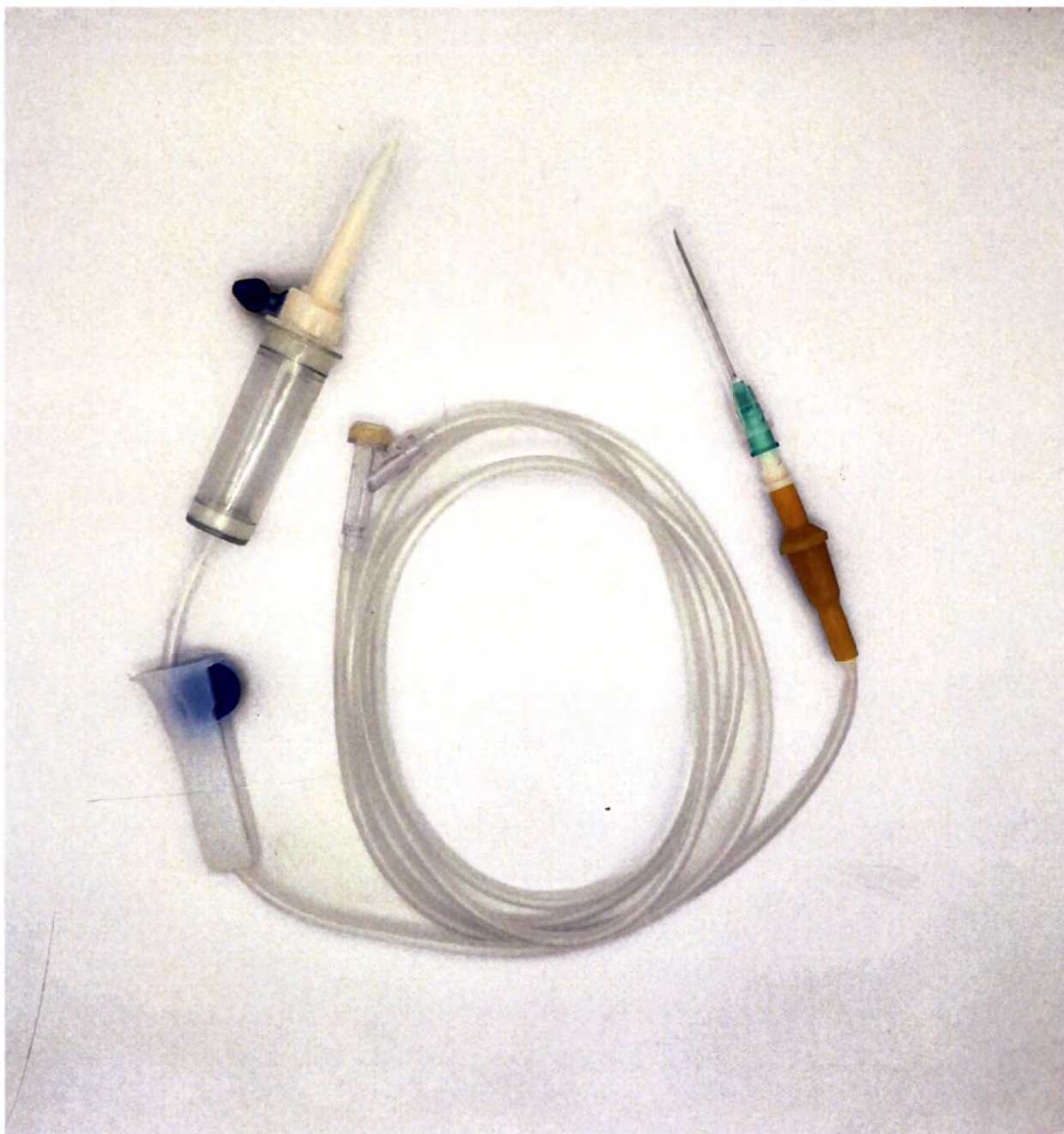

Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®:
JD3YL- XXX (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости
потока, Y-порт, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

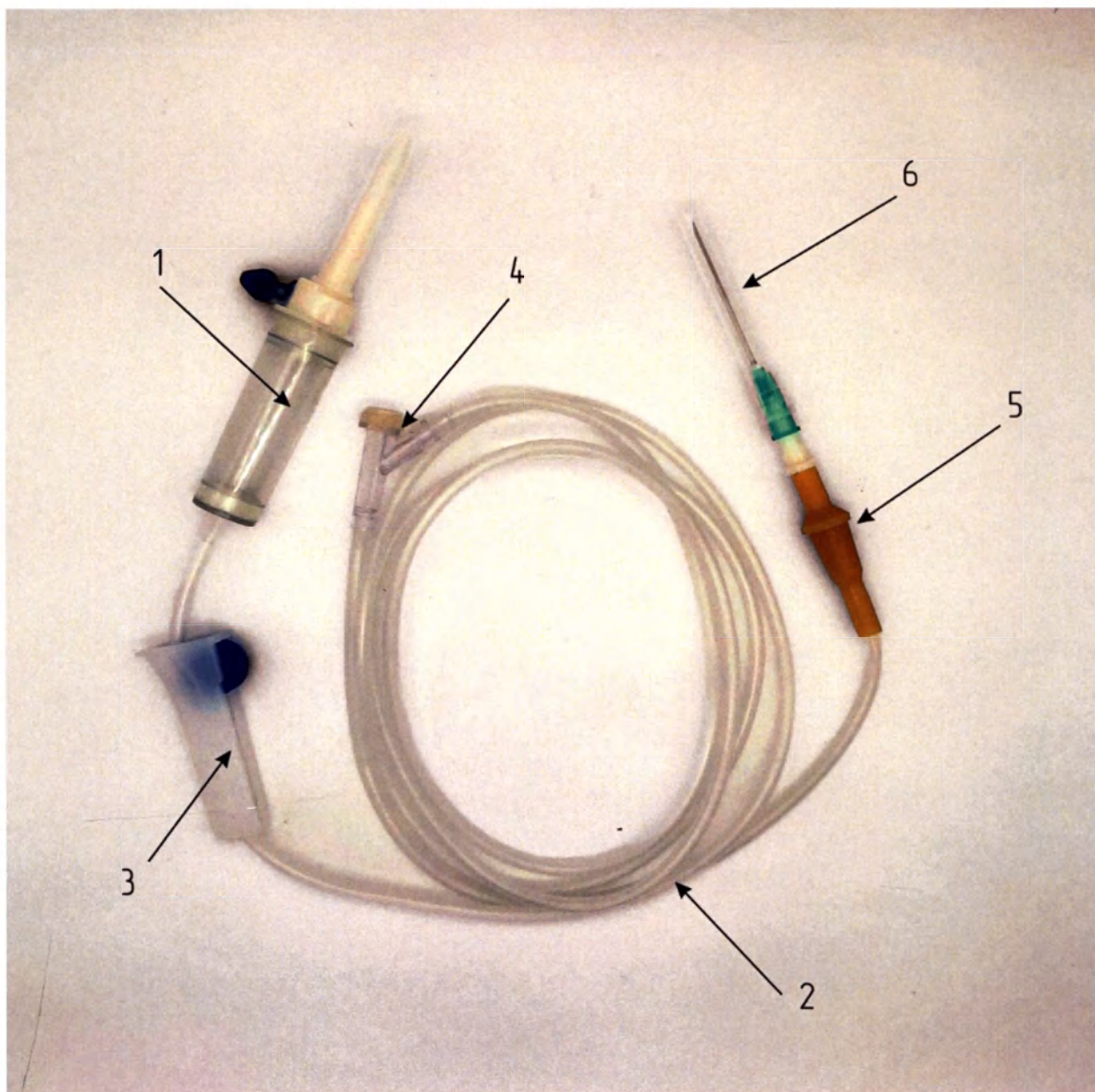

- 1 – капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, 2 – магистраль,
 3 – регулятор скорости потока,
 4 – Y-порт, 5 – инъекционный узел, 6 – инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм)

Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®:
 JD3YL- XXX (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости
 потока, Y-порт, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®
JD3L-160
 КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА
 ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
 РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

**НЕ ПРИМЕНЯТЬ С УНАРУЖИВШЕЙСЯ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ УПАКОВКИ
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ**

И ГРАНИЦЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +15°C ДО +30°C
 И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 90%
 НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 3 М ОТ ГОРЮЧИХ ТЕЖЕЛОТ

• ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ СКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ

• СЛЕДИТЕ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА

• СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАИВАННЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ
 ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ


SALUVIT





STERILE EO

LOT 11203101
 11/2020
 102025

102025
 11/2020
 11203101



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ДОСТАНИЕ УСТРОЙСТВА
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ДО ВЫСОТЫ И ДЛИНЫ ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШИП, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПРОВЕРЬТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ЦЕПЯТВО
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ НАУЗЕР / «АВЕР» ДОК»
- СДВИЖАЯ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯНЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- СБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАИВАННЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHENG FENG MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongxing Industrial Park,
 Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР: ООО «РАФЭЛ», г. Казань, ул. М.Г.Фурманова, 21, пр. д. №1
 440000



Индивидуальная (внутренняя) упаковка и маркировка, на примере: Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, вариант исполнения: JD3L-160 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

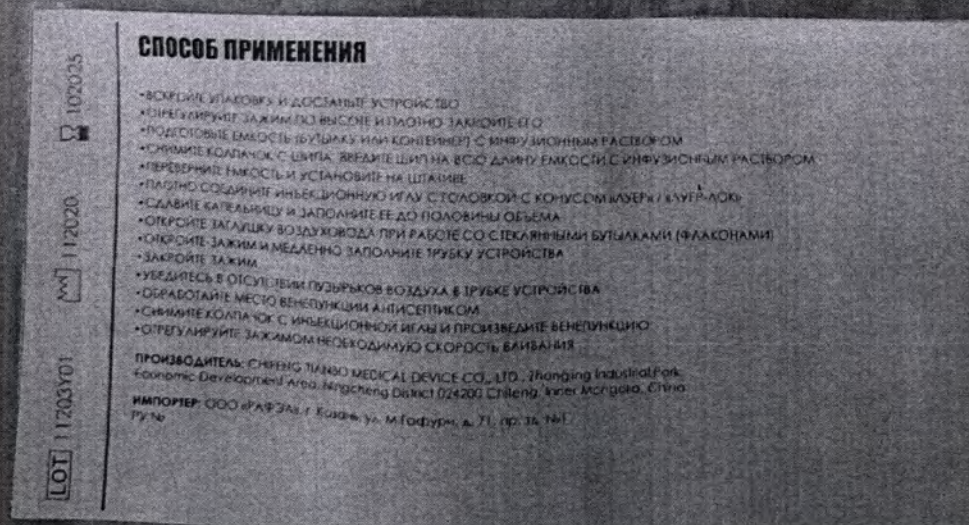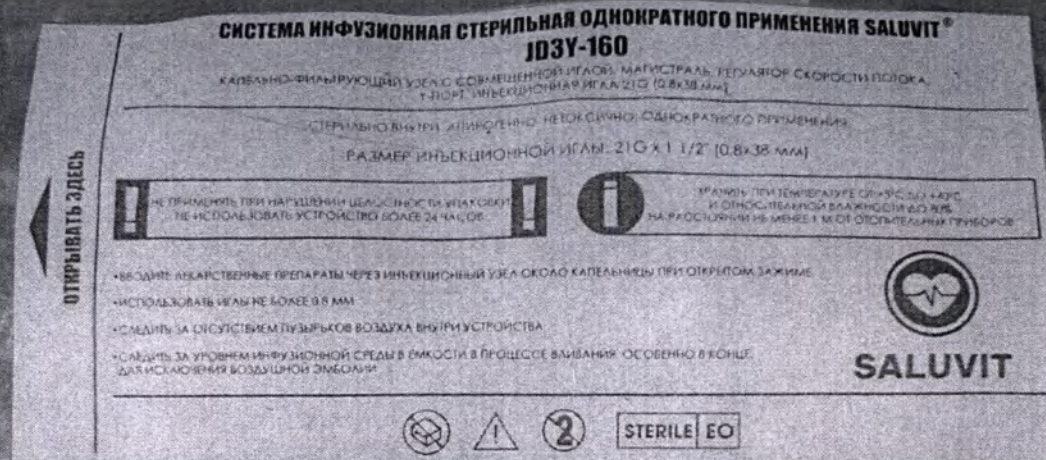

Индивидуальная (внутренняя) упаковка и маркировка, на примере: Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, вариант исполнения: ID3Y-160 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, Y-порт, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

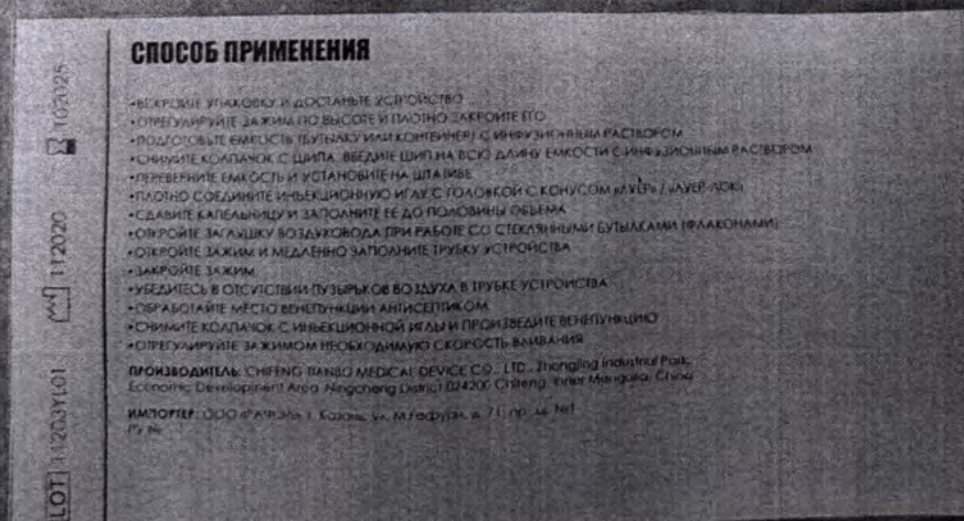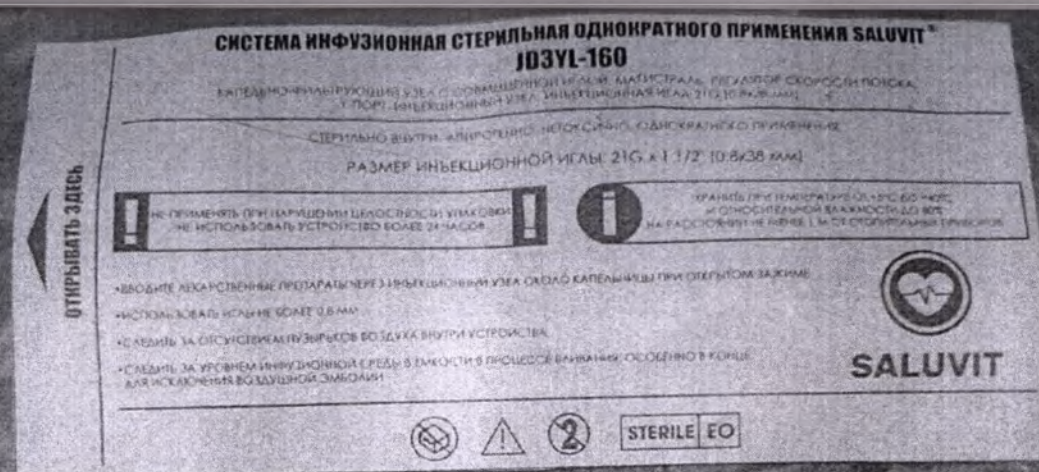

Индивидуальная (внутренняя) упаковка и маркировка, на примере: Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, вариант исполнения: JD3YL-160 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, Y-порт, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм)).

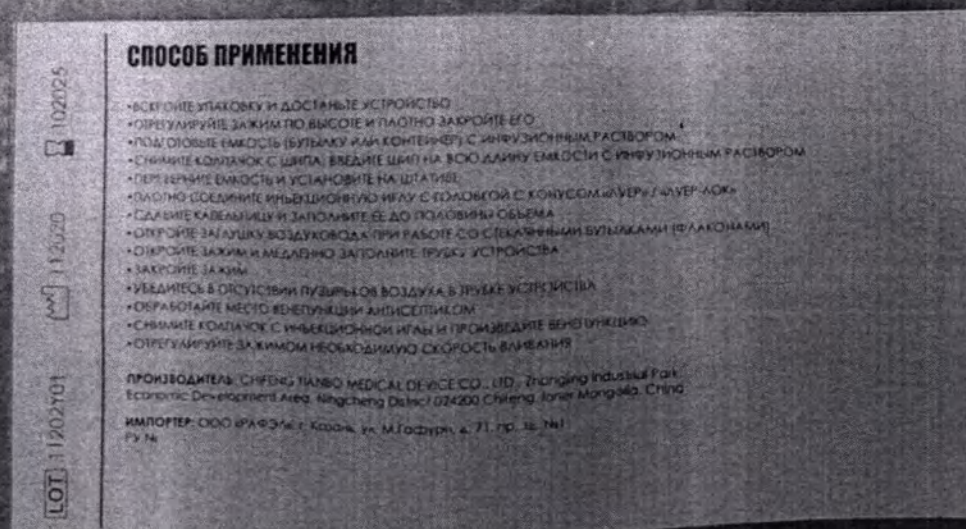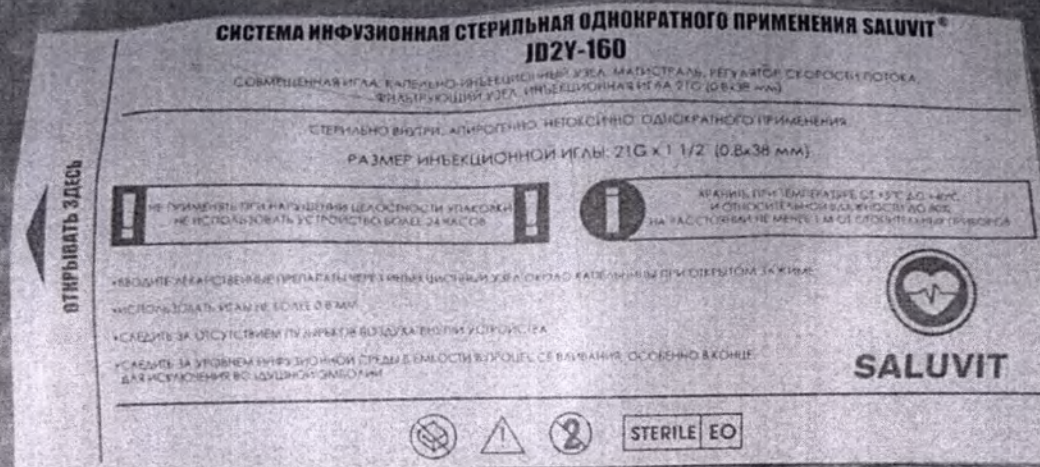

Индивидуальная (внутренняя) упаковка и маркировка, на примере: Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, варианты исполнения: JD2Y-160 (совмещенная игла, капельно-инъекционный узел, магистраль, регулятор скорости потока, фильтрующий узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3YL-150

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
У-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВАИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

SANAMEDICAL



STERILE EO

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВСКРОИТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ШПИГА, ВВЕДИТЕ ШПИГ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОБДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «КАУЕР» / «КАУЕР-ЛОК»
- СДАВИТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯНЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- ВЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВАИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG TANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР: ООО «САНМЕД», Россия, 302008 г. Орел, ул. Выхованская, д. 2Г,
Тел: (4862) 44-32-92, 8 (800) 505-74-64
E-mail: info@sanamedical.ru www.sanamedical.ru
Рр № РЗН/2022/18016-01

Индивидуальная (внутренняя) упаковка и маркировка, на примере: Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®, варианты исполнения: JD3YL-150 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, Y-порт, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3L-130

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1-1/2" (0.8x38 мм)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ ОКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛУ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ
- СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА
- СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

SANAMEDICAL



STERILE EO

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ОТКРОЙТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- РЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИГЛЫ, ВВЕДИТЕ ИГЛУ НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПРОВЕРЬТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛУЕР» / «ЛУЕР-ЛОК»
- ОДВАЙТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОЛПАЧОК С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- РЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ ВЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SHIFENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongjing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР: ООО «САНА», Россия, 352008 г. Сочи, ул. Высоковольтная, д. 27
тел: (4862) 44-32-92, 8 (800) 335-74-44
E-mail: info@sanamedical.ru www.sanamedical.ru
Р/Н № Р3Н 2022/18016 от

Индивидуальная (внутренняя) упаковка и маркировка, на примере: Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®, варианты исполнения: JD3L-130 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL® JD3Y-140

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
Y-ПОРТ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ



ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +5°C ДО +40°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

• ВВОДИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЧЕРЕЗ ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ СКОЛО КАПЕЛЬНИЦЫ ПРИ ОТКРЫТОМ ЗАЖИМЕ

• ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ НЕ БОЛЕЕ 0.8 ММ

• СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА ВНУТРИ УСТРОЙСТВА

• СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ИНФУЗИОННОЙ СРЕДЫ В ЕМКОСТИ В ПРОЦЕССЕ КАЛИВАНИЯ, ОСОБЕННО В КОНЦЕ,
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ

SANAMEDICAL®



STERILE EO

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВОСКРОСИТЕ УПАКОВКУ И ДОСТАВЬТЕ УСТРОЙСТВО
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМ ПО ВЫСОТЕ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЕГО
- ПОДГОТОВЬТЕ ЕМКОСТЬ (БУТЫЛКУ ИЛИ КОНТЕЙНЕР) С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- СНИМИТЕ КОМПОНЕТ С ШИПТА, ВВЕДИТЕ ШИП НА ВСЮ ДЛИНУ ЕМКОСТИ С ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРОМ
- ПЕРЕКРУТИТЕ ЕМКОСТЬ И УСТАНОВИТЕ НА ШТАТИВЕ
- ПЛОТНО СОЕДИНИТЕ ИНЪЕКЦИОННУЮ ИГЛУ С ГОЛОВКОЙ С КОНУСОМ «ЛУНЕР» / «ЛУНЕР-ЛОК»
- СДВИЖАЙТЕ КАПЕЛЬНИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ ДО ПОЛОВИНЫ ОБЪЕМА
- ОТКРОЙТЕ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА ПРИ РАБОТЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ БУТЫЛКАМИ (ФЛАКОНАМИ)
- ОТКРОЙТЕ ЗАЖИМ И МЕДЛЕННО ЗАПОЛНИТЕ ТРУБКУ УСТРОЙСТВА
- ЗАКРОЙТЕ ЗАЖИМ
- УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ТРУБКЕ УСТРОЙСТВА
- ОБРАБОТАЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ АНТИСЕПТИКОМ
- СНИМИТЕ КОМПОНЕТ С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ И ПРОИЗВЕДИТЕ ВЕНЕПУНКЦИЮ
- ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЖИМОМ НЕОБХОДИМУЮ СКОРОСТЬ КАЛИВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHIFENG PANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongqing Industrial Park,
Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Chifeng, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР: ООО «САНМЕД», Россия, 302008 г. Орел, ул. Выходовская д. 2Г


Тел: +7(4862)44-32-92, 8 (800) 505-74-64

E-mail: info@sanamedical.ru www.sanamedical.ru

ИД № РЗН 2022/18216 от

LOT

Индивидуальная (внутренняя) упаковка и маркировка, на примере: Система инфузионная стерильная однократного применения SANAMEDICAL®, варианты исполнения: JD3Y-140 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, Y-порт, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

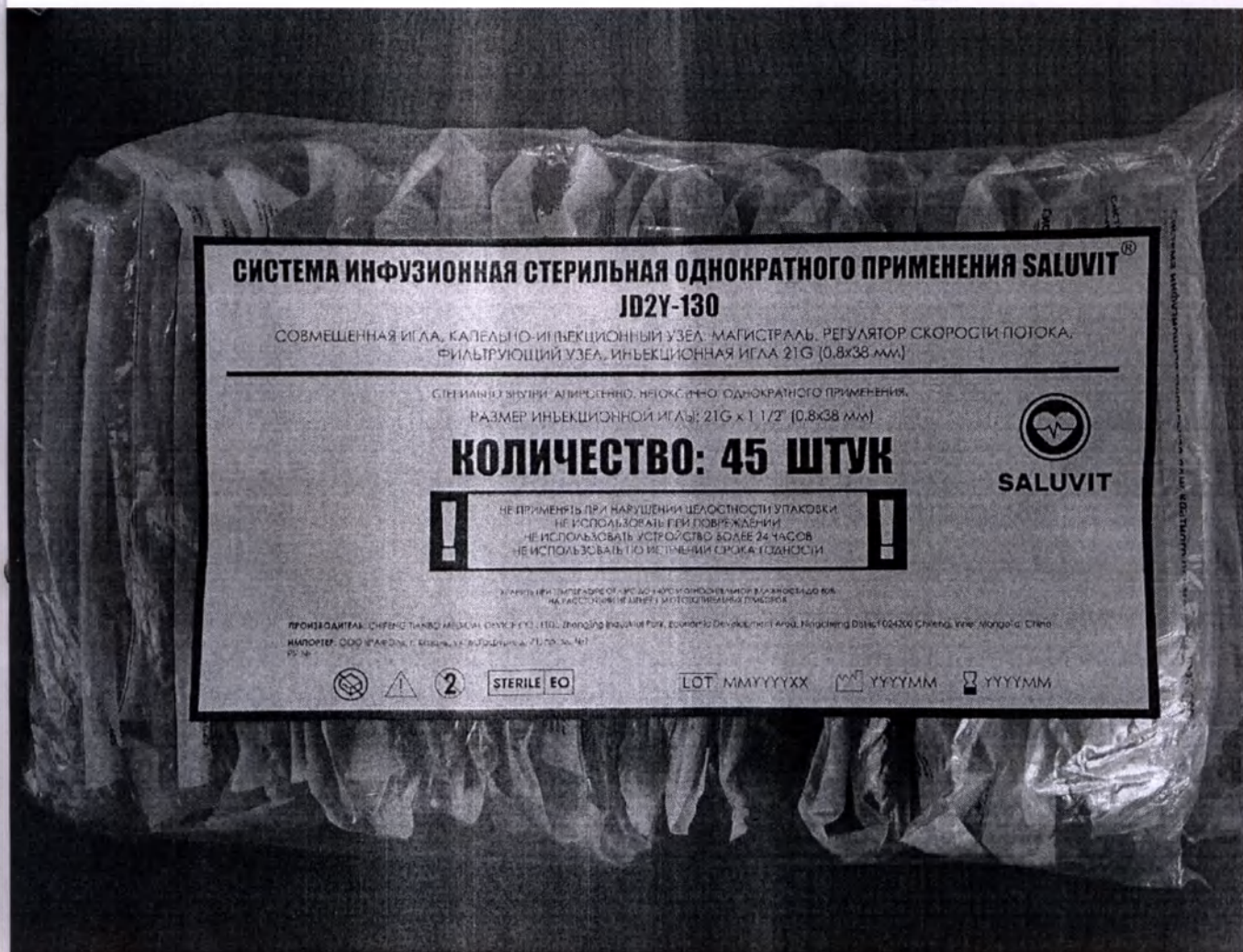

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SALUVIT®

JD2Y-130

СОВМЕЩЕННАЯ ИГЛА, КАПЕЛЬНО-ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНАЯ, НЕТОКСИЧНО, НЕОКСИДНО, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

КОЛИЧЕСТВО: 45 ШТУК



SALUVIT



НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ



УКАЗАТЕЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОРАЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЧИЕНГ ШАНГ ИНДУСТРИАЛ САНХЭНГ ХЭИ, LTD., Zhongshang Industrial Park, Economic Development Area, Hengcheng District, 1624200 China, Inner Mongolia, China

ИМПОРТЕР: ООО ЦИРМИ, г. Москва, ул. Вольная, д. 7, стр. 3, 4-й

PS №:





STERILE EO

LOT MMYYYXX


YYMM

YYMM

Общий вид групповой упаковки и маркировки

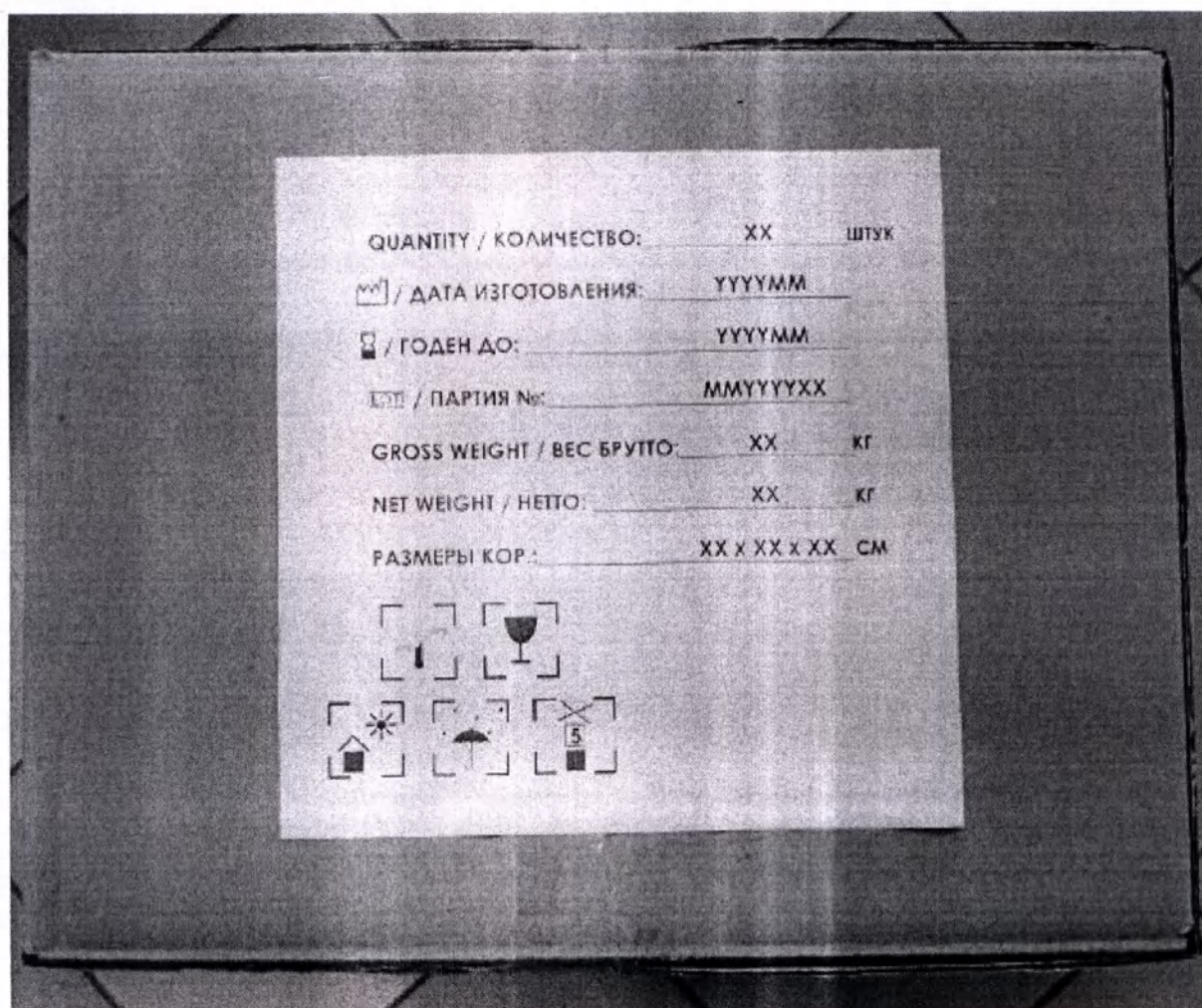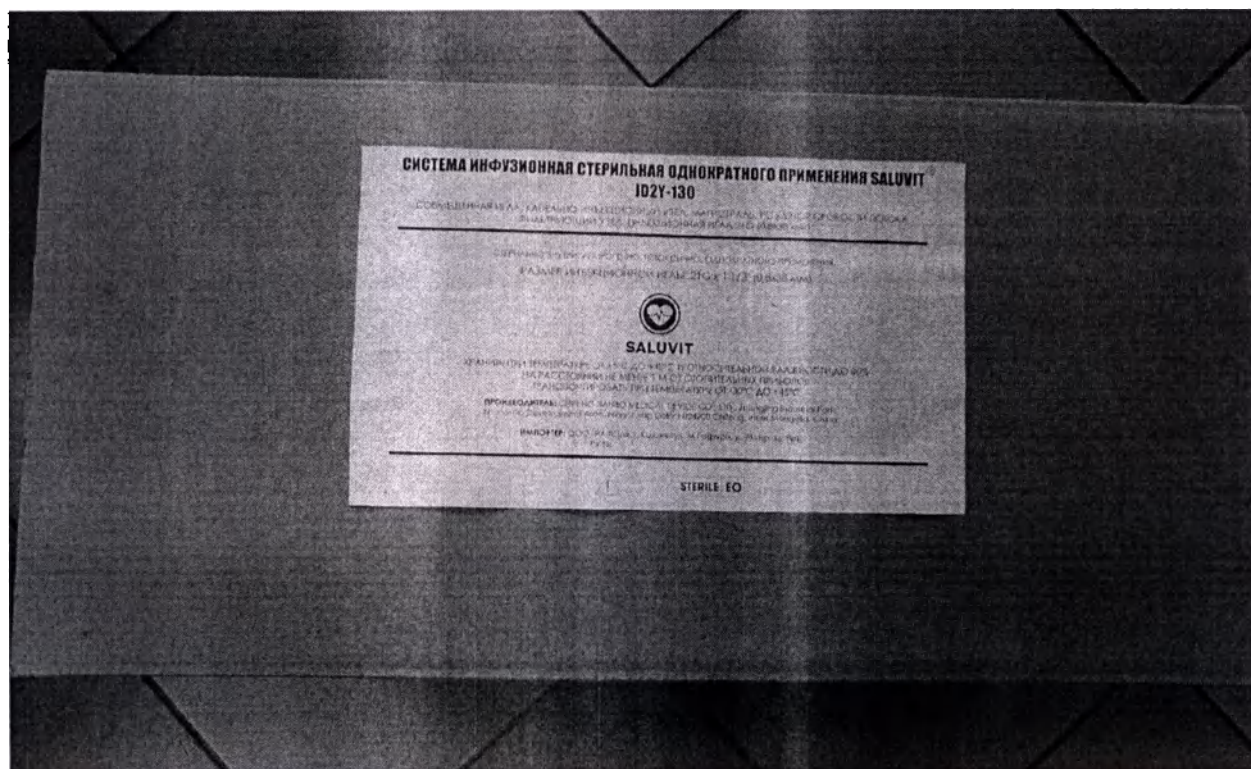

Общий вид транспортной упаковки и маркировки

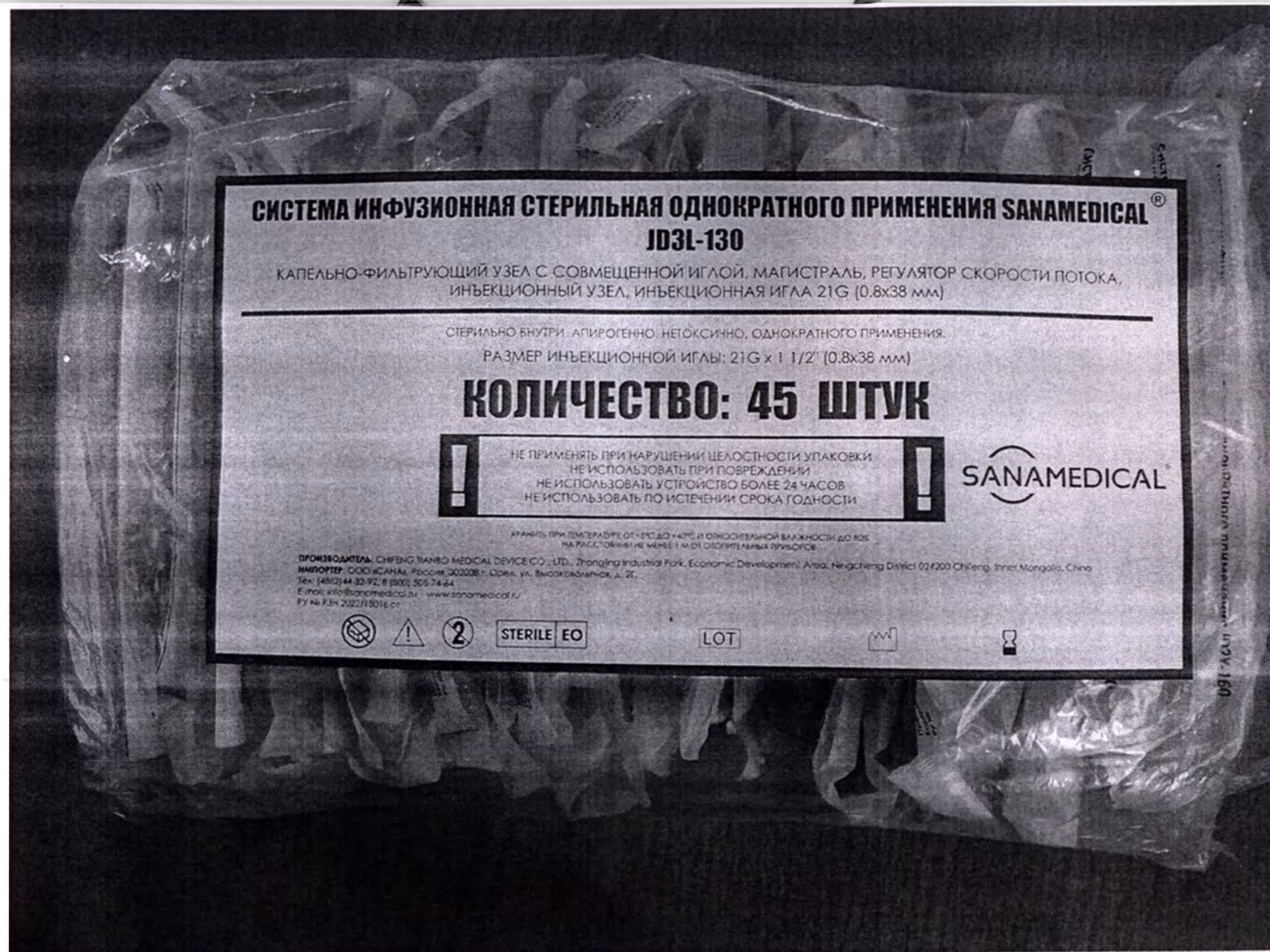

**СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ SANAMEDICAL®
ID3L-130**

КАПЕЛЬНО-ФИЛЬТРУЮЩИЙ УЗЕЛ С СОВМЕЩЕННОЙ ИГЛОЙ, МАГИСТРАЛЬ, РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПОТОКА,
ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ, ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА 21G (0.8x38 мм)

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ. АПИРОГЕННО. НЕТОКСИЧНО. ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗМЕР ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛЫ: 21G x 1 1/2" (0.8x38 мм)

КОЛИЧЕСТВО: 45 ШТУК

! НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ **!**

SANAMEDICAL®

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10 ДО +40°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДО 80%
НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CHENG TIANBO MEDICAL DEVICE CO., LTD., Zhongling Industrial Park, Economic Development Area, Ningcheng District 024200 Cheng, Inner Mongolia, China
ИМПОРТЕР: ООО «САНМЕД», Россия, 302208 г. Орел, ул. Виноградная, д. 21,
Тел: (4862) 44 32 92, 8 (800) 505 74 44
E-mail: info@sanamedical.ru - www.sanamedical.ru
Р/У № РЗН 2022/18016 от



STERILE EO

LOT



Общий вид групповой упаковки и маркировки

ПРИЛОЖЕНИЕ

(справочное)

Варианты исполнения медицинского изделия

Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®, в вариантах исполнения:

I. Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®, варианты исполнения: JD3L-130, JD3L-140, JD3L-150, JD3L-160 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

II. Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®, варианты исполнения: JD3Y-130, JD3Y-140, JD3Y-150, JD3Y-160 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, Y-порт, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

III. Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, SANAMEDICAL®, варианты исполнения: JD3YL-130, JD3YL-140, JD3YL-150, JD3YL-160 (капельно-фильтрующий узел с совмещенной иглой, магистраль, регулятор скорости потока, Y-порт, инъекционный узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

IV. Система инфузионная стерильная однократного применения SALUVIT®, варианты исполнения: JD2Y-130, JD2Y-140, JD2Y-150, JD2Y-160 (совмещенная игла, капельно-инъекционный узел, магистраль, регулятор скорости потока, фильтрующий узел, инъекционная игла 21G (0.8 x 38 мм))

В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
21 февраля 2021 ЛИСТОВ

ДИРЕКТОР

МУХАМЕТЗЯНОВ А.Р.

