

Фотографические изображения МИ
Пояс иммобилизационный для стабилизации таза одноразовый ПСТО-«МЕДПЛАНТ»
по ТУ 32.50.22-040-52777873-2021



Общего вида



Наружная сторона



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316, г. Москва,
Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5., эт.2, пом.1, ком.296-318.
+7 (495) 223-6016 www.medplant.ru

ПОЯС ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ для стабилизации таза одноразовый ПСТО-«МЕДПЛАНТ»

ТУ 32.50.22-040-52777873-2021

РУ № _____ от _____



БОЛЬШОЙ

окружность таза
104-152 см




СРЕДНИЙ

окружность таза
84-128 см



МАЛЫЙ


окружность таза
64-104 см

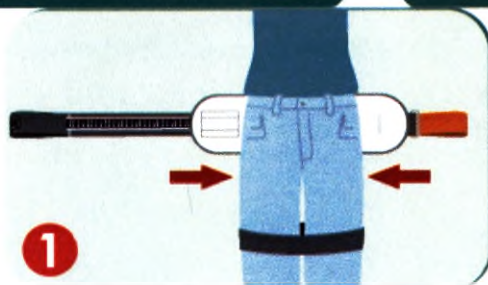

1. Извлеките все предметы из карманов пациента в области таза.

Разместите пояс на уровне бедер так, чтобы белая его сторона прилегла к телу.

Зафиксируйте конечности пациента вместе на уровне коленных суставов с помощью фиксатора ног пациента или подручного материала (бинты, кусок ткани).

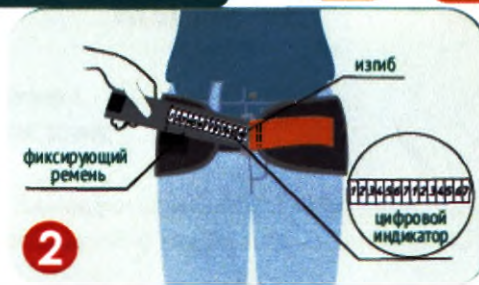

2. Проденьте фиксирующий ремень с цифровым индикатором через пряжку.

Затяните ремень до плотного облегания пациента поясом.

Запомните какая цифра находится на изгибе индикатора.



3. Потяните за петли в противоположных направлениях до тех пор, пока не увидите на изгибе индикатора эту же цифру.

Затем зафиксируйте ремень на поясе с помощью застёжки типа «Велькро».

Год выпуска, срок хранения, номер партии: см. в экспл. док.

EN ISO 13485:2016

Нетоксично



Макет маркировки

МЕДПЛАНТ

арт. _____

**Пояс иммобилизационный для стабилизации таза
одноразовый ПСТО «МЕДПЛАНТ» _____**

РУ № _____ от ____ . ____ . ____

Пояс иммобилизационный для стабилизации таза
одноразовый ПСТО «МЕДПЛАНТ»
по ТУ 32.50.22-040-52777873-2021

Кол-во, шт.

Условия хранения-1

Срок хранения: 36 мес.



Производитель: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия, 109316,
г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318.
тел. +7 (495) 223-6016

Маркировка транспортной тары

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 6
цифрами

(шесть
прописью
—) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А. В.

должность, ФИО

подпись

