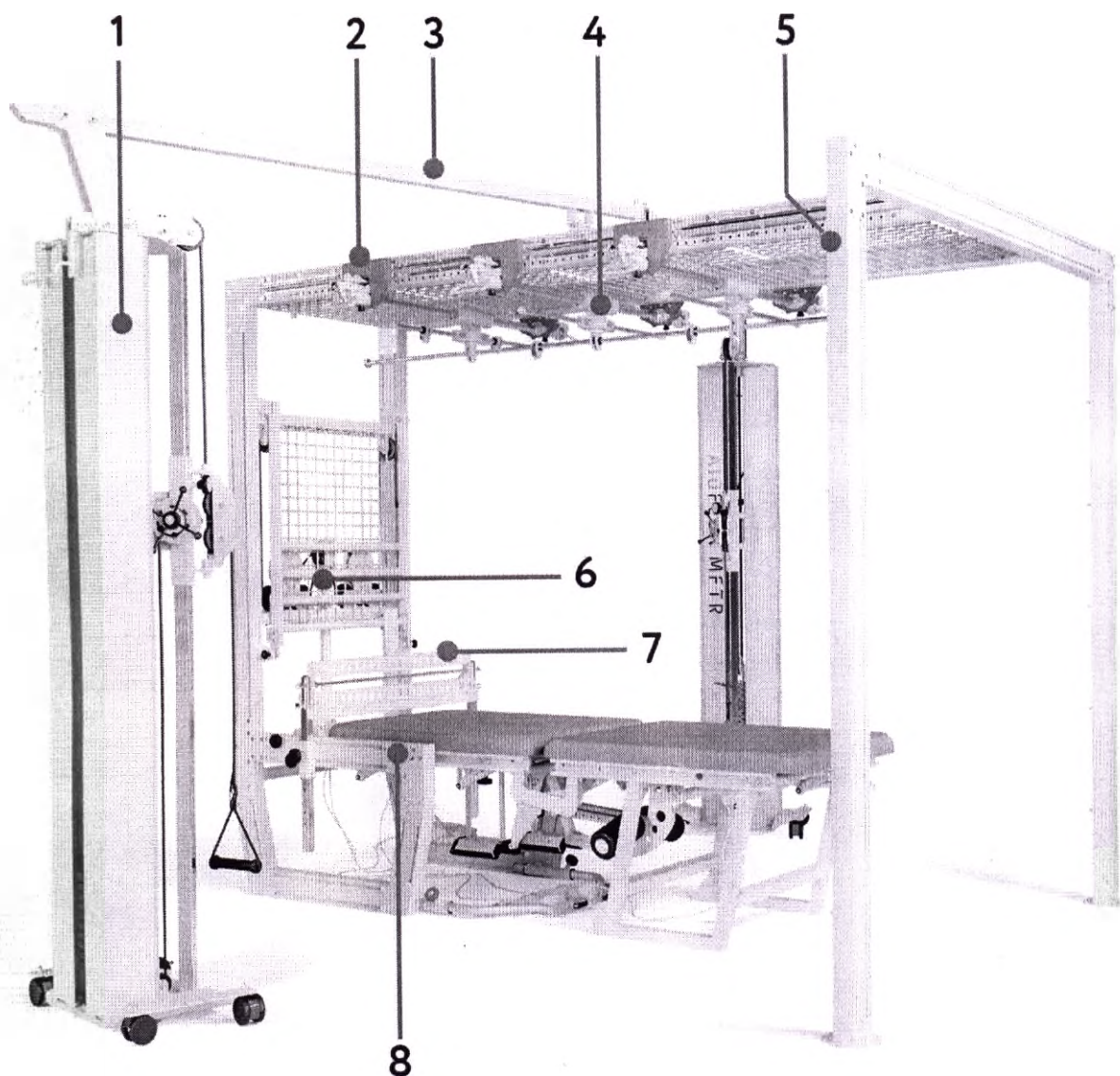


Основные элементы тренажера в максимальной комплектации MFTR-1



1.Силовая стойка. Блочный модуль со стеком грузов присоединяемый к раме и опирающийся на пол. Позволяет создавать постоянное усилие за счет веса грузов, набираемых с шагом под конкретные упражнения. В модуле предусмотрена регулировка направления вытягивания троса по вертикали, по углу поворота и по длине.

2.Слайдерная система. Система плавного перемещения с фиксацией на взаимно перпендикулярных направляющих позволяющая плавно изменять положение и угол подвеса под нагрузкой. Устанавливается на верхней горизонтальной плоскости рамы и может быть совместима только с Рамой П-образной.

3.Система поворота силовых стоек. Механизм поворота силовых стоек на колесных опорах и с системой фиксации по углу поворота. Позволяет поворачивать силовые стойки вокруг пациента для приведения нагрузки от силовых стоек с любой стороны.

4.Разгрузочная система. Решётки, расположенные в горизонтальной и вертикальной плоскости рамы, позволяющие закреплять в узлах принадлежности и передавать усилие от Подъемника, силовых стоек или других частей тела.

5.Рама П-образная. Несущая конструкция из алюминиевых профилей для сборки и установки модулей тренажера без привязки к стене. Рама Г-образная. Несущая конструкция из алюминиевых профилей для сборки и установки модулей тренажера. Рама Г-образная должна крепиться к стене и при необходимости к потолку чтобы выдерживать заданные нагрузки.

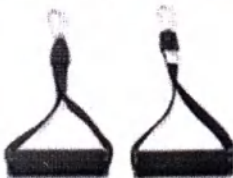
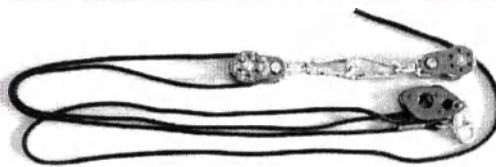
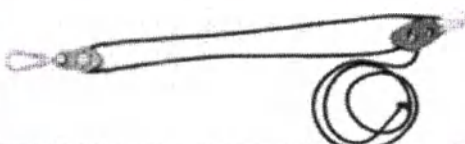
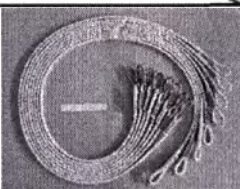
6.Подъемник. Электромеханический привод с двумя канатами для подъема пациента с помощью пояса. Позволяет вертикализировать пациента, частично или полностью разгружать тело и конечности.

7.Упор для ног. П-образная конструкция устанавливаемая на раму с возможностью перемещения вперед/назад, с регулировкой по высоте и выставлению угла наклона упора для стопы. Предназначен для тренировки ног в горизонтальном положении.

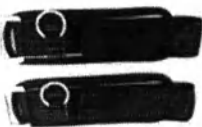
8.Кушетка складная (кушетка). Механизм с мягкой верхней поверхностью для работы с пациентом в лежачем и сидячем положении. Механизм оснащен приводом вертикального перемещения рабочей поверхности и приводом сложения кушетки пополам. Механизм складывания также позволяет сложенную пополам кушетку повернуть на 90 градусов и закрепить в таком положении, чтобы перевести тренажер в режим для вертикализации пациента и освободить пространство для работы с пациентом в кресло каталке или стоя.

9.Принадлежности.

Набор принадлежностей

1		Подвеска широкая	2 шт.
2		Подвеска узкая удлиненная	1 шт.
3		Подвеска узкая двойная	3 шт.
4		Подвеска для ног	2 шт.
5		Подвеска для рук с ручками	2 шт.
6		Блок двойной	6 шт.
7		Блок одинарный	2 шт.
8		Блок для регулировки длины эластичного троса	4 шт.
9		Эластичные тросы (10мм)	8 шт.

Набор принадлежностей

10		Манжета на голеностопный сустав	2 шт.
11		Петля двойная	2 шт.
12		Подъемный ремень под таз	1 шт.
13		Манжета самозатяжная большая	2 шт.
14		Манжета самозатяжная средняя	2 шт.
15		Манжета малая на застежке	2 шт.

Комплект принадлежностей №2

Подвеска широкая - 2шт
 Подвеска узкая удлиненная - 1шт
 Подвеска узкая двойная - 3шт
 Подвеска для ног - 2шт
 Подвеска для рук с ручками - 1 пара
 Блок двойной - 6 шт
 Блок одинарный - 2 шт
 Блок для регулировки длины эластичного троса - 4 шт
 Эластичные тросы (10mm)- 8шт

Комплект принадлежностей №3

Подвеска широкая - 1шт
 Блок одинарный - 1шт
 Подвеска для рук с ручками - 1 пара

Комплект принадлежностей №1

Подвеска широкая - 2шт
 Подвеска узкая удлиненная - 1шт
 Подвеска узкая двойная - 3шт
 Подвеска для ног - 2шт
 Подвеска для рук с ручками - 1 пара
 Блок двойной - 6 шт
 Блок одинарный - 2 шт
 Блок для регулировки длины эластичного троса - 4 шт
 Эластичные тросы (10mm)- 8шт
 Манжета на голеностопный сустав - 1 пара
 Петля двойная - 1 пара
 Подъемный ремень под таз - 1 шт
 Манжета самозатяжная большая - 1 пара
 Манжета самозатяжная средняя - 1 пара
 Манжета малая на застежке - 1 пара