



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкий А.К.
_____ 2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ ПАХОВЫЙ – «КРЕЙТ»»
НЕСТЕРИЛЬНО**

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для профилактики паховых и бедренных грыж, рецидивов после оперативного вмешательства, консервативное лечение паховых грыж.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Профилактика увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж;

Профилактика формирования грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле;

Профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ущемленные и невправляемые грыжи.

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж грыжевой паховый - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-4.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий Б-431, Б-432, Б-433, Б-434

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г		
		Б-431, Б-433	Б-432	Б-434
№ 3	60-80	73,3	108,0	147,0
№ 4	80-100	82,2	114,1	163,1
№ 5	100-120	94,0	126,8	185,9
№ 6	120-140	106,6	141,7	206,9
№ 7	140-160	119,2	156,6	227,9
№ 8	160-180	131,8	171,5	248,9

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделий Б-450, Б-451, Б-456, Б-460

Размер	Обхват бедер, см	Масса, г		
		Б-450, Б-451	Б-456	Б-460
№ 1	88-92	109,2	91,8	69,2
№ 2	92-96	116,1	97,1	72,8
№ 3	96-100	124,6	105,9	81,4
№ 4	100-104	138,6	109,1	89,5
№ 5	104-108	139,6	115,7	87,6
№ 6	108-112	149,6	122,3	93,3
№ 7	112-116	156,2	128,2	106,4
№ 8	116-120	162,8	134,1	119,5
№ 9	120-124	169,4	140,0	132,6
№ 10	124-128	176,0	145,9	145,7
№ 11	128-132	182,6	151,8	158,8
№ 12	132-136	189,2	157,7	171,9

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий Б-455

Размер	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Масса, г
			Б-455
№ 1	88-92	88-92	91,8
№ 2	92-96	92-96	97,1
№ 3	96-100	96-100	105,9
№ 4	100-104	100-104	109,1
№ 5	104-108	104-108	115,7
№ 6	108-112	108-112	122,3
№ 7	112-116	112-116	128,2
№ 8	116-120	116-120	134,1
№ 9	120-124	120-124	140,0
№ 10	124-128	124-128	145,9
№ 11	128-132	128-132	151,8
№ 12	132-136	132-136	157,7

Таблица 4 – Размерный ряд и масса Б-461

Размер	Обхват мошонки, см	Масса, г
		Б-461
№ 1	до 21	50,1
№ 2	до 23	53,0
№ 3	до 25	52,0

№ 4	до 27	54,8
№ 5	до 29	52,6
№ 6	до 31	55,7
№ 7	до 33	58,8
№ 8	до 35	61,9

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Бандаж одевается лежа на спине после вправления грыжевого выпячивания. Пелоты устанавливаются в карманы бандажа с одной или двух сторон, в зависимости от расположения грыжи и типа бандажа (для изделий Б-431, Б-432, Б-433, Б-434).

8.2.1. Бандажи Б-450, Б-451, Б-455, Б-456 надевать рекомендуется только лежа. После чего зафиксировать эластичные застежки непосредственно над грыжевым выпячиванием.

8.2.2. Бандажи Б-460, Б-461 должны плотно прилегать к мошонке, не сдавливая ее.

8.3. СТИРКА И УХОД.

8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.

8.3.2. Отбеливание запрещено.

8.3.3. Не применять барабанную сушилку.

8.3.4. Глажение запрещено.

8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:


ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист(ов)

Руководитель организации

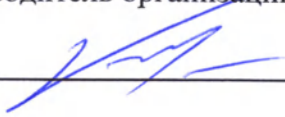





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Крейт»

Кривицкий А.К.

2021 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«БАНДАЖ ГРЫЖЕВОЙ НА БРЮШНУЮ СТЕНКУ – «КРЕЙТ»
НЕСТЕРИЛЬНО**

ТУ 9396 – 006 – 96814693 – 2009

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для поддержания брюшной стенки при пупочной грыже, грыже белой (средней) линии живота, послеоперационной грыже, а также для применения в качестве послеоперационного бандажа после удаления грыжи

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Грыжи брюшной стенки, в т.ч. послеоперационные, пупочные, околопупочные, грыжи белой линии живота;

Операции на брюшной стенке, в т.ч. в области почек, с целью профилактики формирования или рецидива грыжи и уменьшения боли в области шва.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ущемленные и невправляемые грыжи;

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж грыжевой на брюшную стенку - «Крейт»	1
Инструкция	1
Индивидуальная потребительская упаковка	1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

6.2. Не применять при наличии аллергических реакций на материал.

6.3. Не допускается применять по истечении срока хранения.

6.4. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.

6.5. Не использовать вблизи открытого пламени.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1,2.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса Б-400

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
		Б-400
№ 1	45-55	16,6
№ 2	55-65	26,6

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделий Б-416, Б-440, Б-445

Размер	Обхват талии, см	Масса, г		
		Б-416	Б-440	Б-445
№ 3	60-80	136,0	167,8	213,1
№ 4	80-100	150,4	190,8	239,3
№ 5	100-120	172,9	213,2	282,0
№ 6	120-140	193,2	239,1	324,7
№ 7	140-160	213,5	265,0	367,4
№ 8	160-180	233,8	290,9	410,1

7.2 Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

8.1. Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.

8.2. Лежа на спине расположить бандаж так, чтоб аппликатор перекрывал грыжевой мешок. Застегнуть изделие.

8.3. СТИРКА И УХОД.

8.3.1. Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.

8.3.2. Отбеливание запрещено.

8.3.3. Не применять барабанную сушилку.

8.3.4. Глажение запрещено.

8.3.5. Чистка запрещена.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).

9.2. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

9.3. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9.4. Средний срок хранения не менее трех лет

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

11.3. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации





Размер	Обхват талии, см	Масса, г
☐ №3		
☐ №4		
☐ №5		
☐ №6		
☐ №7		
☐ №8		

Бандаж грыжевой на брюшную стенку – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для поддержания брюшной стенки при пупочной грыже, грыже белой (средней) линии живота, послеоперационной грыже, а также для применения в качестве послеоперационного бандажа после удаления грыжи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Грыжи брюшной стенки, в т.ч. послеоперационные, пупочные, околопупочные, грыжи белой линии живот, операции на брюшной стенке, в т.ч. в области почек, с целью профилактики формирования или рецидива грыжи и уменьшения боли в области шва.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Ущемленные и невправляемые грыжи, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж грыжевой на брюшную стенку - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10°C до 40°C. Лежа на спине расположить бандаж так, чтоб аппликатор перекрывал грыжевой мешок. Застегнуть изделие.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°C. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР
ТУ 9396-006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: org@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °C до +40 °C). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °C до +40 °C) и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделий не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии:

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав:

Дата изготовления: 20 г.





Размер	Обхват бедер, см	Масса, г
☐ №1		
☐ №2		
☐ №3		
☐ №4		
☐ №5		
☐ №6		
☐ №7		
☐ №8		
☐ №9		
☐ №10		
☐ №11		
☐ №12		



Бандаж грыжевой паховый – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для профилактики паховых и бедренных грыж, рецидивов после оперативного вмешательства, консервативное лечение паховых грыж.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактика формирования грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле, профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Ущемленные и невправляемые грыжи, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж дорожный – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж одевается лежа на спине после вправления грыжевого выпячивания. Пелоты устанавливаются в карманы бандажа с одной или двух сторон, в зависимости от расположения грыжи и типа бандажа (для изделий Б-431, Б-432, Б-433, Б-434). Бандажи Б-450, Б-451, Б-455, Б-456 надевать рекомендуется только лежа. После чего зафиксировать эластичные застежки непосредственно над грыжевым выпячиванием. Бандажи Б-460, Б-461 должны плотно прилегать к мошонке, не сдавливая ее.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396-006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, krite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделий не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии:

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав:

Дата изготовления: 20 г.





Размер	Обхват бёдер, см	Масса, г
☐ №3		
☐ №4		
☐ №5		
☐ №6		
☐ №7		
☐ №8		

Бандаж грыжевой паховый – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для профилактики паховых и бедренных грыж, рецидивов после оперативного вмешательства, консервативное лечение паховых грыж.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактика формирования грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле, профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Ущемленные и невправляемые грыжи, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж дородовой – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж одевается лежа на спине после вправления грыжевого выпячивания. Пелоты устанавливаются в карманы бандажа с одной или двух сторон, в зависимости от расположения грыжи и типа бандажа (для изделий Б-431, Б-432, Б-433, Б-434). Бандажи Б-450, Б-451, Б-455, Б-456 надевать рекомендуется только лежа. После чего зафиксировать эластичные застежки непосредственно над грыжевым выпячиванием. Бандажи Б-460, Б-461 должны плотно прилегать к мошонке, не сдавливая ее.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную стирку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.

№ ФСР

ТУ 9396-006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделий не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии: _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав: _____

Дата изготовления: _____ 20 ____ г.





Размер	Обхват мошонки, см	Масса, г
☐ №1		
☐ №2		
☐ №3		
☐ №4		
☐ №5		
☐ №6		
☐ №7		
☐ №8		

Бандаж грыжевой паховый – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для профилактики паховых и бедренных грыж, рецидивов после оперативного вмешательства, консервативное лечение паховых грыж.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактика формирования грыж при физической нагрузке, нутуживании и кашле, профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Ущемленные и невправляемые грыжи, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж дорожный – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж одевается лежа на спине после вправления грыжевого выпячивания. Пелоты устанавливаются в карманы бандажа с одной или двух сторон, в зависимости от расположения грыжи и типа бандажа (для изделий Б-431, Б-432, Б-433, Б-434). Бандажи Б-450, Б-451, Б-455, Б-456 надевать рекомендуется только лежа. После чего зафиксировать эластичные застежки непосредственно над грыжевым выпячиванием. Бандажи Б-460, Б-461 должны плотно прилегать к мошонке, не сдавливая ее.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.

№ ФСР

ТУ 9396-006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделий не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии: _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав: _____

Дата изготовления: _____

20 ____ г.





Размер	Обхват талии, см	Обхват бёдер, см	Масса, г
☐ №1			
☐ №2			
☐ №3			
☐ №4			
☐ №5			
☐ №6			
☐ №7			
☐ №8			
☐ №9			
☐ №10			
☐ №11			
☐ №12			



Бандаж грыжевой паховый – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для профилактики паховых и бедренных грыж, рецидивов после оперативного вмешательства, консервативное лечение паховых грыж.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактика формирования грыж при физической нагрузке, нутживании и кашле, профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Ущемленные и невправляемые грыжи, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж дородовой – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж одевается лежа на спине после вправления грыжевого выпячивания. Пелоты устанавливаются в карманы бандажа с одной или двух сторон, в зависимости от расположения грыжи и типа бандажа (для изделий Б-431, Б-432, Б-433, Б-434). Бандажи Б-450, Б-451, Б-455, Б-456 надевать рекомендуется только лежа. После чего зафиксировать эластичные застежки непосредственно над грыжевым выпячиванием. Бандажи Б-460, Б-461 должны плотно прилегать к мошонке, не сдавливая ее.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР
ТУ 9396-006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделий не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии:

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав:

Дата изготовления:

20 г.





Размер	Обхват талии, см	Масса, г
№1		
№2		



Бандаж грыжевой на брюшную стенку – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для поддержания брюшной стенки при пупочной грыже, грыже белой (средней) линии живота, послеоперационной грыже, а также для применения в качестве послеоперационного бандажа после удаления грыжи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Грыжи брюшной стенки, в т.ч. послеоперационные, пупочные, околопупочные, грыжи белой линии живота, операции на брюшной стенке, в т.ч. в области почек, с целью профилактики формирования или рецидива грыжи и уменьшения боли в области шва.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Ущемленные и неправляемые грыжи, индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж грыжевой на брюшную стенку - «Крейт» - 1 шт. Инструкция - 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10°C до 40°C. Лежа на спине расположить бандаж так, чтоб аппликатор перекрывал грыжевой мешок. Застегнуть изделие.

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°C. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР
ТУ 9396-006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: lorg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м. от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения изделий не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии:

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав:

Дата изготовления:

20

г.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 лист(ов)

Руководитель организации

И.А. 26.11.2026





Размер изделия:

Количество изделий:

Бандаж грыжевой паховый – «Крейт»

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от _____ 20 _____ года.

№ ФСР _____

ТУ 9396 – 006–96814693–2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп. 4, литер А, пом. 24 Н, тел. 8 (800) 700 - 68 -50, e-mail: torg@kreitspb.ru. www.kreitspb.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150 – 69, но для температуры от -40 °С до ± 40 °С. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения не менее 3-х лет.

Дата изготовления: _____ 20 _____ г.

Номер партии: _____



Размер изделия:

Количество изделий:

Бандаж грыжевой на брюшную стенку – «Крейт»

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от [] 20 [] года.

№ ФСР []

ТУ 9396 – 006–96814693–2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп. 4, литер А, пом. 24 Н, тел. 8 (800) 700 - 68 -50, e-mail: torg@kreitspb.ru. www.kreitspb.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150 – 69, но для температуры от -40 °С до ± 40 °С. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения не менее 3-х лет.

Дата изготовления: [] 20 [] г.

Номер партии: []