

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «РМК Групп»

Терехин Р.Л



2021 г.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

медицинского изделия

«Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) стерильные

по ТУ 32.50.13-001-05354754-2020»

производства ООО «РМК Групп», Россия

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью


PMK

Щипцы биопсийные одноразовые серии DF стерильные

- Диаметр инструмента: 2,3 мм
- Рабочая длина: 2300 мм
- Для канала: Ø 2,8 мм

Артикул: DF-2323МО

Кол-во в инд. упаковке — 1 шт.

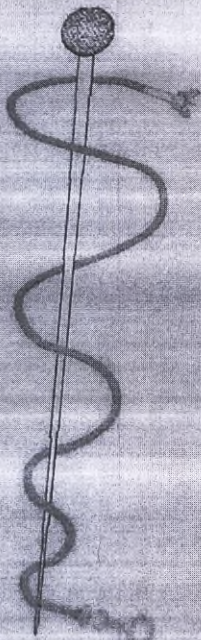

ру № _____
от « _____ » 20 ____ г.

Стерилизовано
оксидом этилена

STERILEO

LOT

№ партии: 19022011

Произведено:

19.02.2020 г.

Годен до:

февраль 2023 г.

2

Не использовать повторно

Не использовать при
повреждении упаковки

Хранить с сухом месте в
дали от солнечных лучей
при 10-40°C и 30-85 %
влажности

Применение:

- Аккуратно введите щипцы в рабочий канал эндоскопа, рабочие части при этом должны быть закрыты.
- При возникновении сопротивления по ходу движения щипцов необходимо максимально распрямить эндоскоп
- Под визуальным контролем направьте щипцы к месту получения образца ткани
- Путем плавного смыкания рабочих щечек захватите необходимую для исследования пробу
- Далее инструмент с полученным образцом ткани в закрытом положении медленно выводится из тела пациента
- Утилизировать инструмент после использования

ООО «РМК Групп», адрес: Республика Татарстан, 420036, г. Казань,
ул. Балинского, д. 21Б; склад №4, помещение №2
тел: +7 (843) 251-00-19, Rmkrf@mail.ru


1. Упаковка индивидуальная



Щипцы биопсийные одноразовые серии DF стерильные

- Диаметр инструмента: 2,3 мм
- Рабочая длина: 2300 мм
- Для канала: Ø 2,8 мм

Артикул: DF-2323MO
Кол-во в групповой уп. — 10 шт.

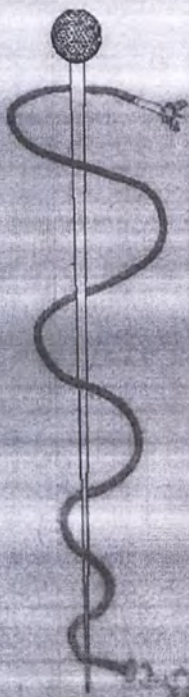

РУ № _____
от « _____ » 20__ г.

Стерилизовано
оксидом этилена **STERILEO**

LOT № партии: 190220/1

Произведено: 19.02.2020 г.

Годен до: февраль 2023 г.

Не использовать повторно

Не использовать при повреждении упаковки

Хранить с сухом месте вдали от солнечных лучей при 10-40°C и 30-85 % влажности

Применение:

- Аккуратно введите щипцы в рабочий канал эндоскопа, рабочие части при этом должны быть закрыты.
- При возникновении сопротивления по ходу движения щипцов необходимо максимально распрямить эндоскоп
- Под визуальным контролем направьте щипцы к месту получения образца ткани
- Путем плавного смыкания рабочих чашечек захватите необходимую для исследования пробу
- Далее инструмент с полученным образцом ткани в закрытом положении медленно выводится из тела пациента
- Утилизировать инструмент после использования

ООО «РМК Групп», адрес: Республика Татарстан, 420036, г. Казань,
ул. Белинского, д. 21Б, склад №4, помещение №2
тел: +7 (843) 251-00-19, Rmkrf@mail.ru

2. Упаковка групповая

Щипцы биопсийные
одноразовые овальные,
стерильные

- Диаметр инструмента: 2,3 мм
- Рабочая длина: 2300 мм
- Для канала: $\varnothing$ 2,8 мм

Артикул: DF-2323MO
Кол-во в транспортной уп. –
7 групповых уп. по 10 шт.



ООО «РМЖ Групп», адрес: Республика Татарстан, 420036, г. Казань,
ул. Белинского, д. 21Б, склад №4, помещение №2
тел: +7 (843) 251-00-19, Rmkrf@mail.ru

РУ № _____
от «__» _____ 20__ г.

Стерилизовано
оксидом этилена

STERILE EO

LOT № партии: 19022011



Произведено: 19.02.2020 г.



Годен до: февраль 2023 г.



Не использовать повторно



Не использовать при
повреждении упаковки



Хранить с сухом месте в
дали от солнечных лучей
при 10-40°C и 30-85 %
влажности



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «РМК 1 руни»
Торехин Р.Л.
« 31 » 11 2021 г.

1) DF3830-05

ФОТОМАТЕРИАЛЫ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«Инструменты многоповерхностного воздействия (завязанные) стерильные
по ТУ 32.50.13-001-05354754-2020»
производства ООО «РМК 1 руни», Россия



2) DF3812-05

3) DF1815-05



4) DF1826-05



5) DF1828-05



6) DF1822-05



7) DF1823-05



8) DF2315-OM



9) DF2316-OM



10) DF 2318-OM



11) DF2320-OM



14) DF2416 OM



15) DF2418 OM



12) DF2323 OM



13) DF2415 OM



19) DF2316-CM



18) DF2315-CM



17) DF2423-OM



16) DF2422 OM

20) DF2318-CM



21) DF2322 CM

22) DF2323-CM



23) DF1810-OSN



24) DF1812-OSN



25) DF1815-OSN



26) DF1816-OSN



27) DF1818-OSN





МНОГОКРАТНОЕ




МНОГОКРАТНОЕ

МНОГОКРАТНОЕ






ИМНО-ЕЗНУЮ 16Е

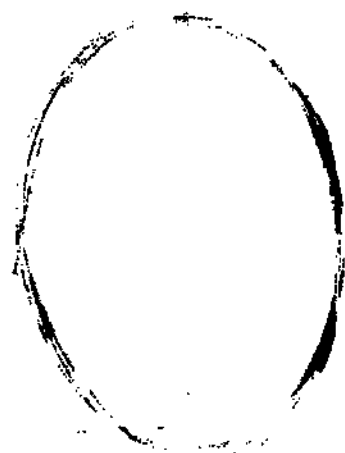

ИМНО-ЕЗНУЮ 16Е

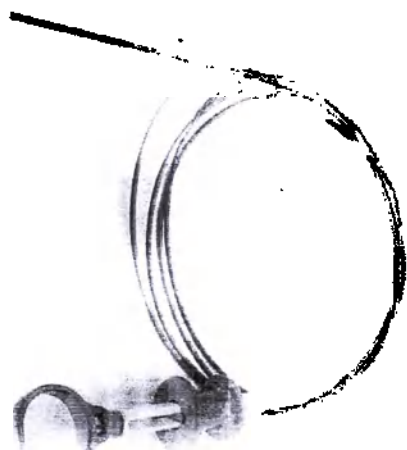

ИМНО-ЕЗНУЮ 16Е



ИМНО-ЕЗНУЮ 16Е

40) ДР-2315-СМН



41) ДР-2316-СМН



42) ДР-2317-СМН

43) ДР-2318-СМН



44) ДР-2319-СМН



47) DF1815-AS



46) DF1817-AS



45) DF1810-AS



44) DF2323-CM/N



51) Df1823-AS



50) Df1822-AS



49) Df1818-AS



48) Df1816-AS

52) DF2315-AM



53) DF2316-AM



54) DF2318-AM



55) DF2322-AM



56) DF2323-AM



57) DF1810-ASN




58) DF1512-ASN



59) DF1815-ASN



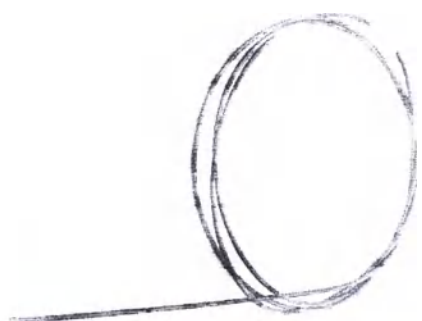


63) DF1823-ASN



62) DF1822-ASN



61) DF1818-ASN

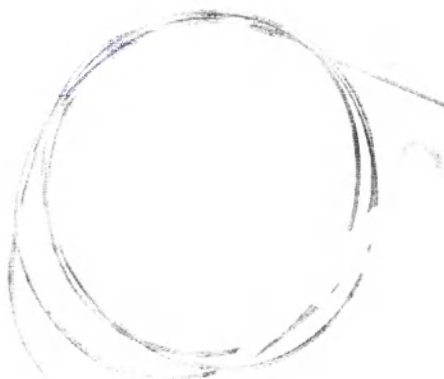

60) DF1816-ASN



67) DF2322-AMN



66) DF2318-AMN



65) DF2316-AMN



64) DF2315-AMN



71) DF2323-RL



70) DF2318-RL

68) DF2323-AMN



69) DF2312-RL

