





**Бандаж дородовый – «Крейт», Б-120
(а также Б-101, Б-102, Б-103)**

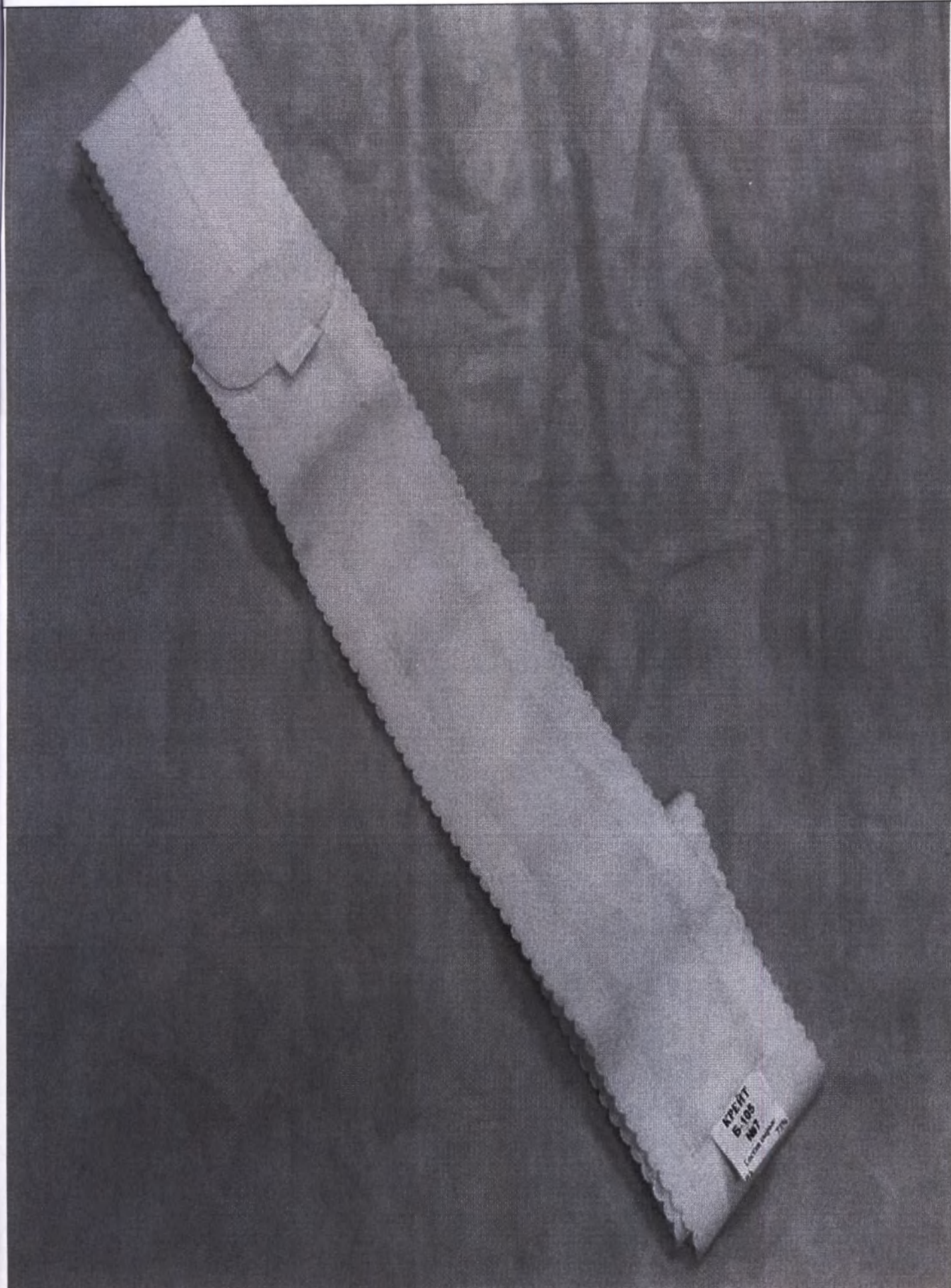

**Бандаж дородовый – «Крейт», Б-105
(а также Б-104)**

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации

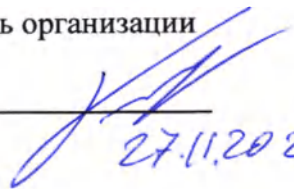

27.11.2021



Макет ярлыка для маркировки изделий

КРЕЙТ

Артикул
Размер

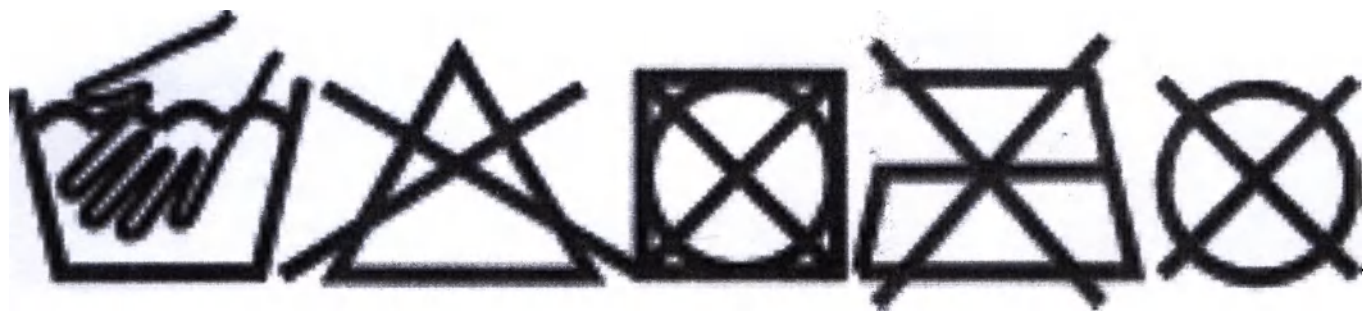

Состав основного
материала изделия:



Размер	Обхват под животом, см	Масса, г
☐ №3		
☐ №4		
☐ №5		
☐ №6		
☐ №7		
☐ №8		

Бандаж дородовый – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для ношения с 20 – 24 недель беременности и до ее окончания с целью поддержания и предохранения живота от растяжек, а также для разгрузки мышц спины.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Беременность с 20-24 недели; Дискомфорт или болевые ощущения, тяжесть в области поясничного отдела во время беременности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Может стимулировать гипертонус матки во время беременности при его наличии. Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Бандаж дородовый – «Крейт» – 1 шт. Инструкция – 1 шт.

Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Надеть бандаж в положении лежа на спине, зафиксировать застежку бандажа под животом. Отрегулировать степень поддержки живота с помощью эластичной стяжки (для всех артикулов кроме Б-105).

СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от

20 _____ года.

№ ФСР

ТУ 9396-006-96814693-2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Номер партии:

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав:

Дата изготовления:

20 _____

г.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

27.11.2021





Размер изделия:

Количество изделий:

Бандаж дородовый – «Крейт»

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 006–96814693–2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп. 4, литер А, пом. 24 Н, тел. 8 (800) 700 - 68 -50, e-mail: torg@kreitspb.ru. www.kreitspb.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150 – 69, но для температуры от -40 °С до ± 40 °С. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения не менее 3-х лет.

Дата изготовления:

20

Номер партии:

КОПИЯ ВЕРНА





Получатель:

Адрес:

Телефон:

Номер заказа:

Вес брутто:

Отправитель: ООО «Крейт»

Адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д. 10

Телефон: 8 (812) 748-25-00

