

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»
Фомина Н.В.
«28» 2021 г.



М.П.

ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции
по ТУ 21.20.23-008-18023326-2021

I. Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 3,5 мм OVUPLAN в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.



Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 3,5 мм OVUPLAN в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.



Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 4,0 мм в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.




Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 4,0 мм в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.




Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 5,0 мм в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.

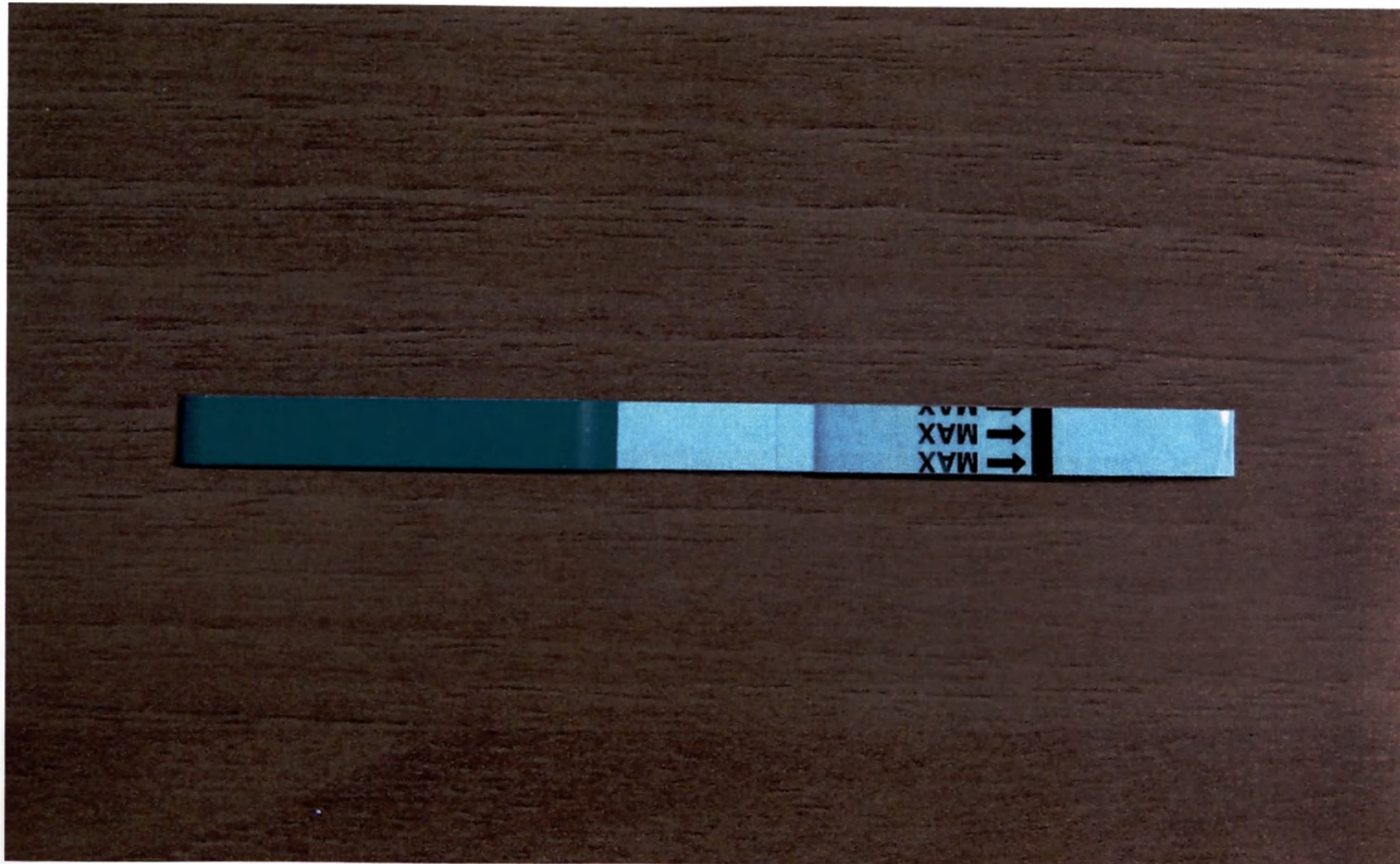


VI. Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 5,0 мм MIAPLAN в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.

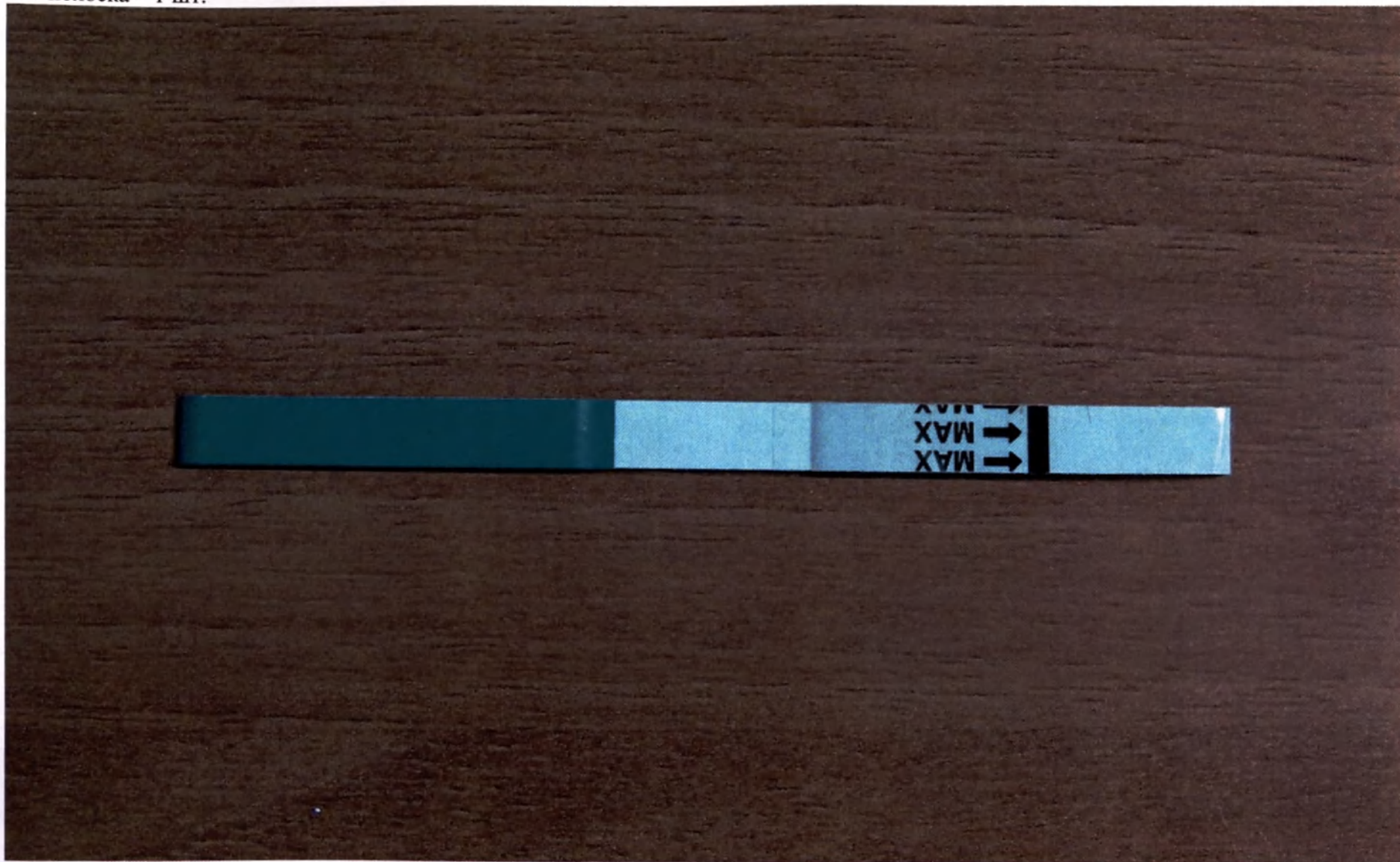


Тест-полоска в струйной кассете для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 6,0 мм в составе:

1. Тест-полоска в струйной кассете – 1 шт.

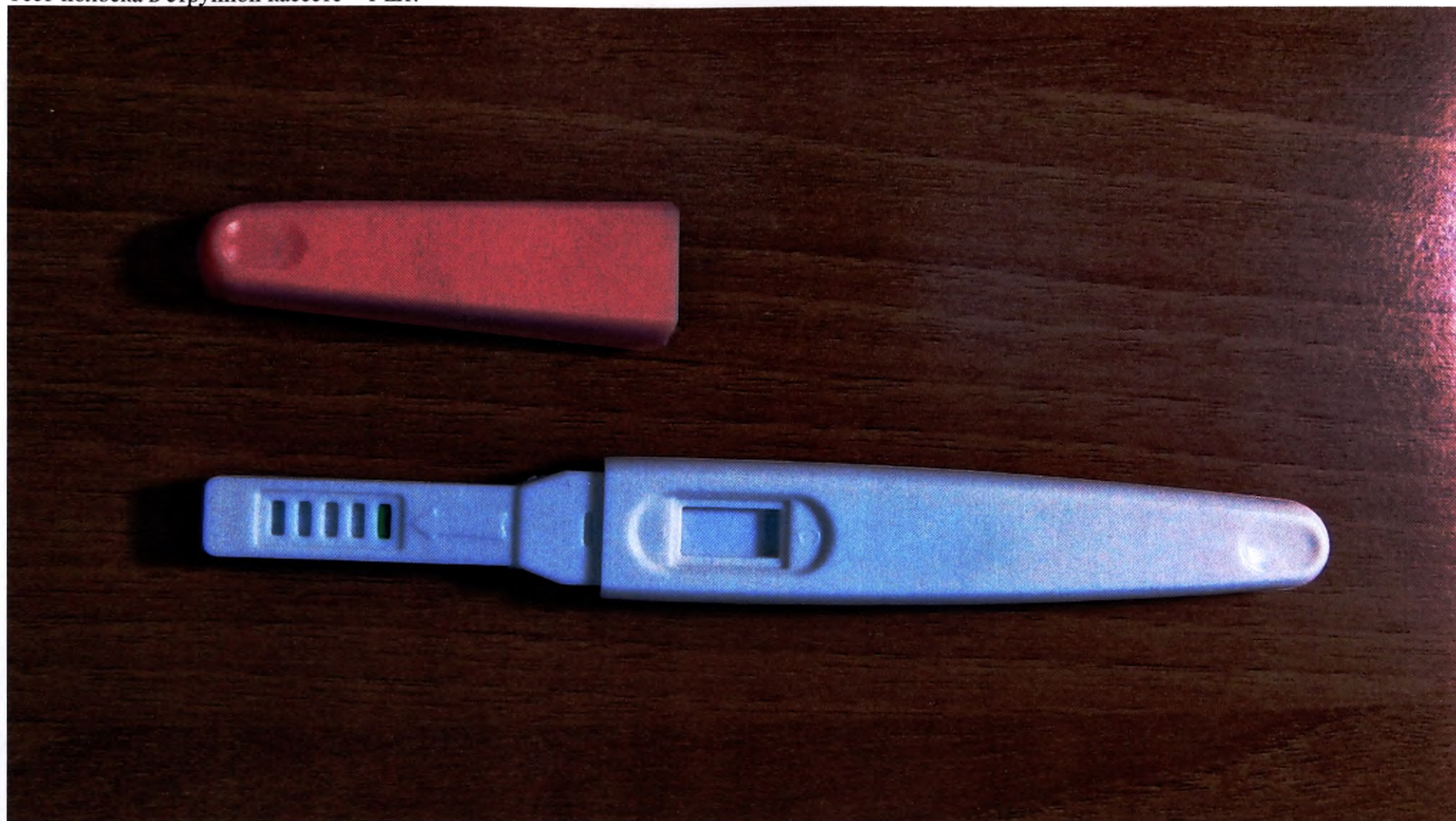


Тест-полоска в струйной кассете для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 6,0 мм в составе:

1. Тест-полоска в струйной кассете – 1 шт.

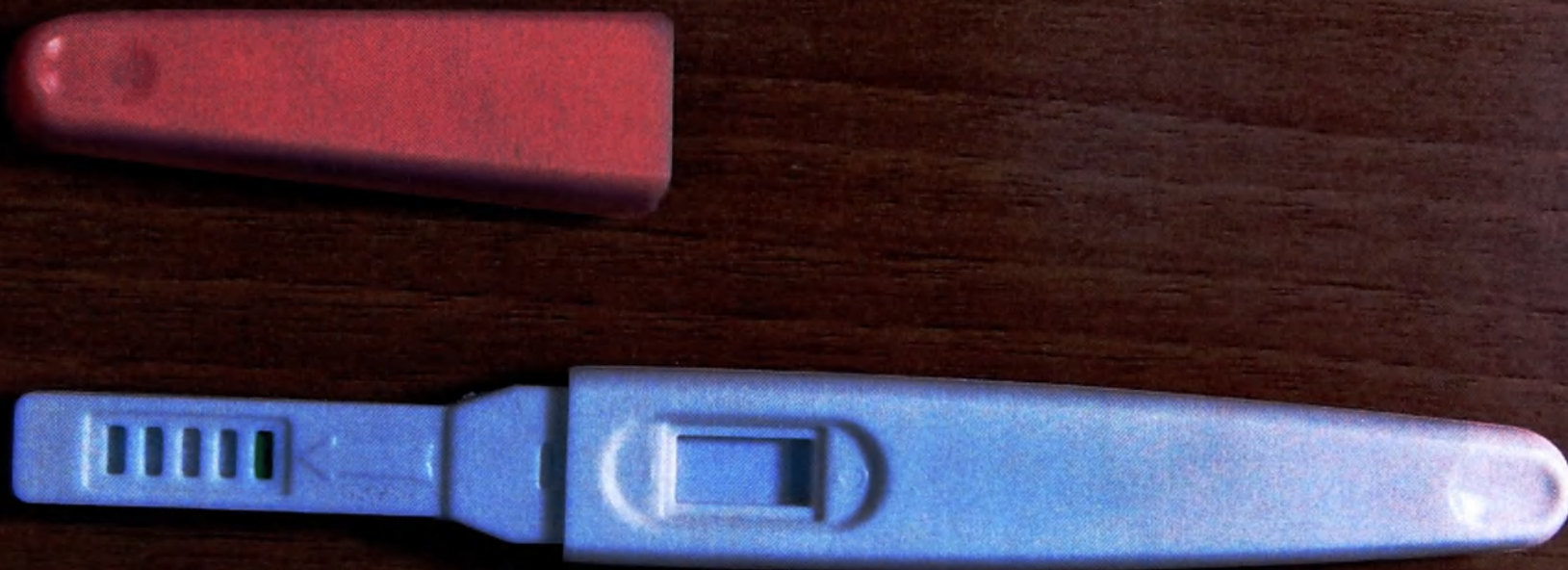

Фольгированный пакет

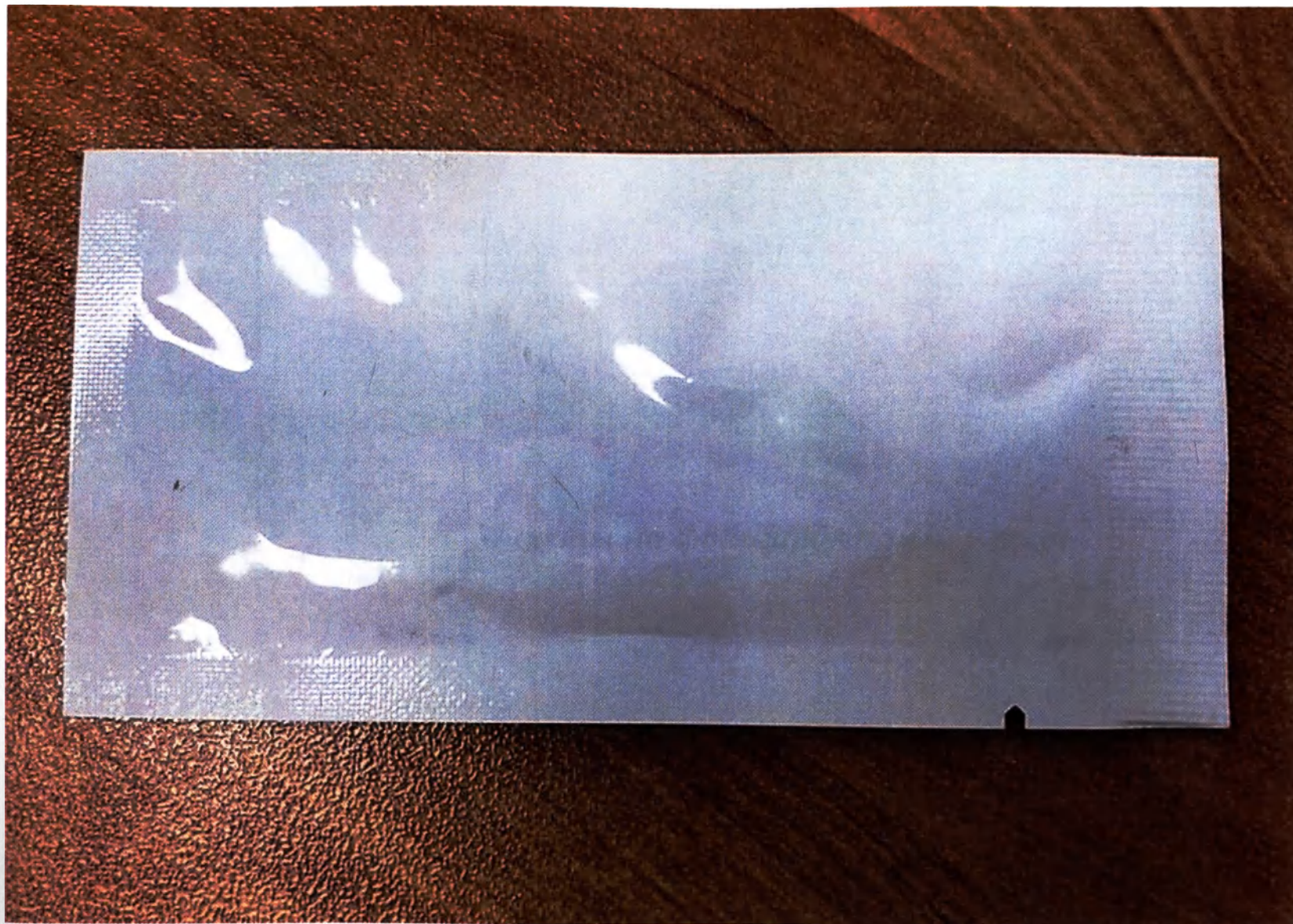

Макеты на фольгированный пакет

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ ОВУПЛАН

УЗНАЙ СЕЙЧАС!



быстро • просто • надежно

Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 3,5 мм. OvuPLAN в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.
2. Фольгированный пакет – 1 шт.
3. Инструкция по применению.

1 тест

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Извлеките тест-полоску из герметичной индивидуальной упаковки.
2. Погрузите тест-полоску вертикально в образец мочи концом, обозначенном стрелками на 5-10 секунд.
3. Положите тест-полоску на ровную, непигментирующую, чистую поверхность.
4. Считайте результат через 10 минут, но не позднее 30 минут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Положительный (наличие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска такой же интенсивности окраски, как и контрольная* или темнее, чем контрольная.

Отрицательный (отсутствие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска светлее, чем контрольная* или вообще не видна.



Положительный



Отрицательный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для определения дней, когда вероятность зачатия ребенка максимально высока.

Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования	Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования
21	День 6	31	День 14
22	День 6	32	День 15
23	День 7	33	День 16
24	День 7	34	День 17
25	День 8	35	День 18
26	День 9	36	День 19
27	День 10	37	День 20
28	День 11	38	День 21
29	День 12		
30	День 13		

Например, если длина Вашего обычного цикла 26 дней, по таблице Вы можете определить, что необходимо начать тестироваться с 9 дня.

Принцип тестирования основан на определении количества роста лютеинизирующего гормона (ЛГ). Чувствительность теста 25 мМЕ/мл ЛГ в моче. Обычно овуляция наступает примерно от 24 до 48 часов после начала повышения уровня ЛГ гормона. Этот промежуток времени и есть наиболее благоприятный для зачатия ребенка.

До того, как начать использовать тест, Вы должны определить длину Вашего обычного менструального цикла. Длина цикла определяется как количество дней от первого дня начала менструации (этот день считается) до первого дня начала следующей менструации (этот день не считается). Для более точного определения длины Вашего обычного цикла желательно взять среднее значение трех последних циклов. Например, последние три цикла составляли 24, 26 и 28 дней, среднее значение будет $(24+26+28)/3=26$ дней. После того, как Вы определили длину Вашего обычного цикла, сверьтесь с таблицей для определения дня начала тестирования.

В среднем требуется 3-5 дней ежедневного тестирования в одно и то же время. Каждый раз используйте новую тест-полоску.

Заканчивайте тестироваться, как только Вы обнаружили повышение уровня ЛГ гормона (положительный результат).

Эксплуатировать при температуре 10-30 °C.

Изделие стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

Производитель: ООО «ЭТАПОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317

Адрес производства: (отмечено ниже А или В)

А: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.4, 2 этаж, Помещение 223 (138) по БТИ

В: Rumbio Biotech Co., LTD, Rongsheng Technological Zone, Univ. Road, Shantou City, 515063 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение №

По ТУ 21.20.23-008-18023326-2021

Для профессионального применения и для самотестирования

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке.

Хранить в оригинальных и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке.

Не применять внутри




OvuPLAN® - зарегистрированная торговая марка

LOT: Номер серии (LOT): 20210215

Дата изготовления (MFG): 02/2021

Срок годности (EXP): 02/2024

Адрес производства: А

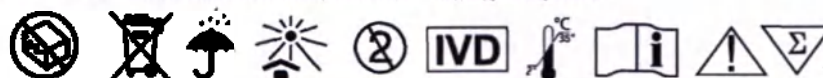

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

1 тест

Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 4,0 мм в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.
2. Фольгированный пакет – 1 шт.
3. Инструкция по применению.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Извлеките тест-полоску из герметичной индивидуальной упаковки.
2. Погрузите тест-полоску вертикально в образец мочи концом, обозначенном стрелками на 5-10 секунд.
3. Положите тест-полоску на ровную, невпитывающую, чистую поверхность.
4. Считайте результат через 10 минут, но не позднее 30 минут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Положительный (наличие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска такой же интенсивности окраски, как и контрольная* или темнее, чем контрольная.

Отрицательный (отсутствие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска светлее, чем контрольная* или вообще не видна.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для определения дней, когда вероятность зачатия ребенка максимально высока.

Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования	Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования
21	День 6	31	День 14
22	День 6	32	День 15
23	День 7	33	День 16
24	День 7	34	День 17
25	День 8	35	День 18
26	День 9	36	День 19
27	День 10	37	День 20
28	День 11	38	День 21
29	День 12		
30	День 13		

Например, если длина Вашего обычного цикла 26 дней, по таблице вы можете определить, что необходимо начать тестироваться с 9 дня.

Принцип тестирования основан на определении количества роста лютеинизирующего гормона (ЛГ). Чувствительность теста 25 мМЕ/мл ЛГ в моче. Обычно овуляция наступает примерно от 24 до 48 часов после начала повышения уровня ЛГ гормона. Этот промежуток времени и есть наиболее благоприятный для зачатия ребенка.

До того, как начать использовать тест, Вы должны определить длину Вашего обычного менструального цикла. Длина цикла определяется как количество дней от первого дня начала менструации (этот день считается) до первого дня начала следующей менструации (этот день не считается). Для более точного определения длины Вашего обычного цикла желательно взять среднее значение трех последних циклов. Например, последние три цикла составляли 24, 26 и 28 дней, среднее значение будет $(24+26+28)/3=26$ дней. После того, как Вы определили длину Вашего обычного цикла, сверьтесь с таблицей для определения дня начала тестирования.

В среднем требуется 3-5 дней ежедневного тестирования в одно и то же время. Каждый раз используйте новую тест-полоску.

Заключайте тестироваться, как только Вы обнаружили повышение уровня ЛГ гормона (положительный результат).

Эксплуатировать при температуре 10-30 °C.

Изделие стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317

Адрес производства (отмечено ниже А или В)

А: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.4, 2 этаж, Помещение 223 (138) по БТИ

В: Ruidao Biotech Co., LTD, Rongcheng Technological Zone, Umi, Road, Shantou City, 515063 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение №

По ТУ 21.20.23-008-18023326-2021

Для профессионального применения и для самотестирования

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке.

Хранить в защищенных и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке.

Не применять внутри.



LOT
MFG
EXP
Номер серии (LOT): 20210215
Дата изготовления (MFG): 02/2021
Срок годности (EXP): 02/2024

Адрес производства: А



ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

1 тест


ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Извлеките тест-полоску из герметичной индивидуальной упаковки.
2. Погрузите тест-полоску вертикально в образец мочи концом, обозначенном стрелками на 5-10 секунд.
3. Положите тест-полоску на ровную, неглитывающую, чистую поверхность.
4. Считайте результат через 10 минут, но не позднее 30 минут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Положительный (наличие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска такой же интенсивности окраски, как и контрольная* или темнее, чем контрольная.

Отрицательный (отсутствие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска светлее, чем контрольная* или вообще не видна.

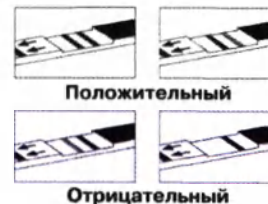

Тест-полоска для качественного иммунометодического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 5.0 мм в составе:

1. Тест-полоска – 1 шт.
2. Фольгированный пакет – 1 шт.
3. Инструкция по применению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для определения дней, когда вероятность зачатия ребенка максимально высока.

Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования	Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования
21	День 6	31	День 14
22	День 6	32	День 15
23	День 7	33	День 16
24	День 7	34	День 17
25	День 8	35	День 18
26	День 9	36	День 19
27	День 10	37	День 20
28	День 11	38	День 21
29	День 12		
30	День 13		

Например, если длина Вашего обычного цикла 26 дней, по таблице вы можете определить, что необходимо начать тестироваться с 9 дня.

Принцип тестирования основан на определении количества роста лютеинизирующего гормона (ЛГ). Чувствительность теста 25 мМЕ/мл ЛГ в моче. Обычно овуляция наступает примерно от 24 до 48 часов после начала повышения уровня ЛГ гормона. Этот промежуток времени и есть наиболее благоприятный для зачатия ребенка.

До того, как начать использовать тест. Вы должны определить длину Вашего обычного менструального цикла. Длина цикла определяется как количество дней от первого дня начала менструации (этот день считается) до первого дня начала следующей менструации (этот день не считается). Для более точного определения длины Вашего обычного цикла желательно взять среднее значение трех последних циклов. Например, последние три цикла составляли 24, 26 и 28 дней, среднее значение будет $(24+26+28)/3=26$ дней. После того, как Вы определили длину Вашего обычного цикла, сверьтесь с таблицей для определения дня начала тестирования.

В среднем требуется 3-5 дней ежедневного тестирования в одно и то же время. Каждый раз используйте новую тест-полоску.

Заканчивайте тестироваться, как только Вы обнаружили повышение уровня ЛГ гормона (положительный результат).

Эксплуатировать при температуре 10-30 °C.

Изделие стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

Производитель: ООО «ЭТАПОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, офис 317

Адрес производства: (отмечено ниже А или В)

А: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, 2 этаж, Помещение 223 (158) по БТИ

В: Ruxio Biotech Co., LTD, Rongsheng Technological Zone, Uhu Road, Shantou City, 515083 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение № ...

По ТУ 21.20.23-008-18023326-2021

Для профессионального применения и для самотестирования

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке

Хранить в защищенных и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке

Не применять внутри




LOT

Номер серии (LOT): 20210215

Дата изготовления (MFG): 02/2021

Срок годности (EXP): 02/2024

Адрес производства: А

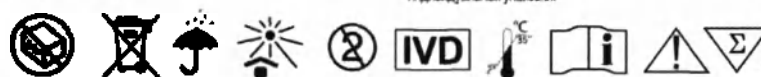



ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

Тест-полоска для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/LH) в моче человека для определения овуляции 5,0 мм MIAPLAN

Для профессионального применения и для самотестирования

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке.

Хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке.

Не применять внутрь

Чувствительность теста 25 мМЕ/мл

Эксплуатировать при температуре 10-30°C.

Изделие стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317

Адрес производства: (отмечено ниже А или В)

А: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.4, 2 этаж, Помещение 223 (138) по БТИ

В: Runbio Biotech Co., LTD, Rongsheng Technological Zone, Univ. Road, Shantou City, 515063 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение №

По ТУ 21.20.23-008-18023326-2021



Адрес производства: А

Номер серии (LOT): 20210215

Дата изготовления (MFG): 02/2021

Срок годности (EXP): 02/2024



ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

Тест-полоска в струйной кассете для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 6,0 мм

Для профессионального применения и для самотестирования

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке.

Хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке.

Не применять внутрь

Чувствительность теста 25 мМЕ/мл

Эксплуатировать при температуре 10-30°C.

Изделие стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317


Адрес производства: (отмечено ниже А или В)

А: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.4, 2 этаж, Помещение 223 (138) по БТИ

В: Runbio Biotech Co., LTD, Rongsheng Technological Zone, Univ. Road, Shantou City, 515063 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение №

По ТУ 21.20.23-008-18023326-2021

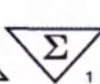

Номер серии (LOT): 20210215

Дата изготовления (MFG): 02/2021



Срок годности (EXP): 02/2024

Адрес производства: А



Тест-полоска в струйной кассете для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 6,0 мм в составе:

1. Тест-полоска в струйной кассете – 1 шт.
2. Фольгированный пакет – 1 шт.
3. Инструкция по применению.

ТЕСТЫ НА ОВУЛЯЦИЮ

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Извлеките тест-полоску в струйной кассете из упаковки.
2. Снимите колпачок и направьте открытый впитывающий наконечник струйной кассеты вниз. Удерживайте впитывающий наконечник под струей мочи до тех пор, пока он не станет полностью влажным (около 5-10 секунд).
- ВНИМАНИЕ!** По желанию можно собрать мочу в чистую и сухую емкость, а затем погрузить в нее только впитывающий наконечник струйного теста на 5-10 секунд.
3. Положите струйную кассету на ровную, чистую поверхность.
4. Считайте результат через 10 минут, но не позднее 30 минут.



Положительный (наличие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска такой же интенсивности окраски, как и контрольная* или темнее, чем контрольная.

Отрицательный (отсутствие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска светлее, чем контрольная* или вообще не видна.

*-контрольная полоска всегда располагается в конце окошечка, ближе к ручке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для определения дней, когда вероятность зачатия ребенка максимально высока.

Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования	Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования
21	День 5	31	День 14
22	День 6	32	День 15
23	День 7	33	День 16
24	День 7	34	День 17
25	День 8	35	День 18
26	День 9	36	День 19
27	День 10	37	День 20
28	День 11	38	День 21
29	День 12		
30	День 13		

Например, если длина Вашего обычного цикла 26 дней, по таблице вы можете определить, что необходимо начать тестироваться с 9 дня.

Принцип тестирования основан на определении количества роста лютеинизирующего гормона (ЛГ). Чувствительность теста 25 мМЕ/мл ЛГ в моче. Обычно овуляция наступает примерно от 24 до 48 часов после начала повышения уровня ЛГ гормона. Этот промежуток времени и есть наиболее благоприятный для зачатия ребенка.

До того, как начать использовать тест, Вы должны определить длину Вашего обычного менструального цикла. Длина цикла определяется как количество дней от первого дня начала менструации (этот день считается) до первого дня начала следующей менструации (этот день не считается). Для более точного определения длины Вашего обычного цикла желательно взять среднее значение трех последних циклов. Например, последние три цикла составляли 24, 26 и 28 дней, среднее значение будет $(24+26+28)/3=26$ дней. После того, как Вы определили длину Вашего обычного цикла, сверьтесь с таблицей для определения дня начала тестирования.

В среднем требуется 3-5 дней ежедневного тестирования в одно и то же время. Каждый раз используйте новую тест-полоску.

Заканчивайте тестироваться, как только Вы обнаружили повышение уровня ЛГ гормона (положительный результат).

Эксплуатировать при температуре 10-30 °C.

Изделие стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

Производитель: ООО «СТАЛОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317.

Адрес производства: (отмечено ниже А или В)

А: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.4, 2 этаж, Помещение 223 (138) по БТИ

В: Runtio Biotech Co., LTD, Rongsheng Technological Zone, Univ. Road, Shantou City, 515063 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение № ...

По ТУ 21.20.23-008-18023326-2021

Для профессионального применения и для самотестирования

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке

Хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке

Не применять внутрь



Номер серии (LOT): 20210215

Дата изготовления (MFG): 02/2021

Срок годности (EXP): 02/2024

Адрес производства: А





ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

Тест-полоска в струйной кассете для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 6,0 мм

Для профессионального применения и для самотестирования

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке.

Хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке.

Не применять внутрь

Чувствительность теста 25 мМЕ/мл

Эксплуатировать при температуре 10-30°C.

Изделие стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

Производитель: ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.2, офис 317

Адрес производства: (отмечено ниже А или В)


А: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр.4, 2 этаж, Помещение 223 (138) по БТИ

В: Runbio Biotech Co., LTD, Rongsheng Technological Zone, Univ. Road, Shantou City, 515063 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение №

По ТУ 21.20.23-008-18023326-2021

Адрес производства: А

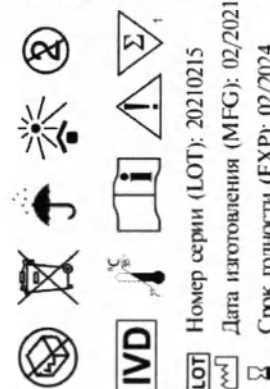

Номер серии (LOT): 20210215
Дата изготовления (MFG): 02/2021
Срок годности (EXP): 02/2024

Картонная коробка (макеты)



1. Тест-полоска – 5 шт.
2. Фольгированный пакет – 5 шт.
3. Карточка-коробка – 1 шт.
4. Инструкция по применению.

ТЕСТЫ НА ОВУЛЯЦИЮ

КОМПЛЕКТ
5
ТЕСТОВ

УЗНАЙ
СЕЙЧАС!



ОВУПЛАН
OvuPLAN

ТЕСТЫ НА ОВУЛЯЦИЮ

ОВУПЛАН
OvuPLAN

УЗНАЙ СЕЙЧАС!

Подробная информация на сайте www.ovuplan.ru

Принцип тестирования основан на определении количества роста лютеинизирующего гормона (ЛГ). Чувствительность теста – 25 мЕд/мл ЛГ в моче.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Извлеките тест-полоску из герметичной индивидуальной упаковки.
2. Погрузите тест-полоску вертикально в образец мочи наконечником, обозначенным стрелками на 5-10 секунд.
3. Положите тест-полоску на ровную, негладкую, чистую поверхность.
4. Считайте результат через 10 минут, но не позднее 30 минут.

Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования	Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования
21	День 6	31	День 14
22	День 6	32	День 15
23	День 7	33	День 16
24	День 7	34	День 17
25	День 8	35	День 18
26	День 9	36	День 19
27	День 10	37	День 20
28	День 11	38	День 21
29	День 12		
30	День 13		

До того, как начать использовать тест, Вы должны определить длину Вашего обычного менструального цикла. Длина цикла определяется как количество дней от первого дня начала менструации (этот день не считается) до первого дня начала следующей менструации (этот день не считается). Для более точного определения длины Вашего обычного цикла желательно взять среднее значение трех последних циклов. Например, последние три цикла составили 24, 26 и 28 дней, среднее значение будет $(24+26+28)/3=26$ дней. После того, как Вы определили длину Вашего обычного цикла, сверьтесь с таблицей для определения дня начала тестирования.

В среднем требуется 3-5 дней ежедневного тестирования в одну и ту же время. Каждый раз используйте новую тест-полоску.

Обычно овуляция наступает примерно от 24 до 48 часов после начала повышения уровня ЛГ гормона. Этот промежуток времени и есть наиболее благоприятный для зачатия ребенка.

Например, если длина Вашего обычного цикла 26 дней, по таблице вы можете определить, что необходимо начать тестироваться с 9 дня.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Наличие повышения уровня ЛГ гормона: тестовая полоска такой же интенсивности окраски, как и контрольная* или темнее, чем контрольная.

положительный



Отсутствие повышения уровня ЛГ гормона: тестовая полоска светлее, чем контрольная* или вообще не видна.

отрицательный

* – контрольная полоска всегда располагается ближе к ручке.

ОВУПЛАН
OvuPLAN


Для профессионального применения и для самотестирования

Регистрационное удостоверение №
Пат. 21.20.23-008-1802336-0021
Применяется в ООО «СТАВОН»
193240, г. Липки, 141802 Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2,
офис 317

Адрес производства: (отмечено V)
Россия, 141903, Московская область,
Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 2, этаж. Помещение 223 (136)
то 61V

Rundis Robot Co., LTD. Rongcheng
Technological Zone, Univ. Road,
Zhengzhou City, 515063, Guangdong,
China

Не применять внутри.
OvuPLAN® – зарегистрированная торговая марка.

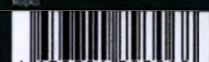

№ Серии (LOT): 20210215
Дата изготовления (MFG): 05/2021
Срок годности (EXP): 02/2024

MiAPlan

Тест-полоска для качественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 5,0 мм MIAPLAN

в составе:
1. Тест-полоска – 5 шт.
2. Фольгированный пакет – 5 шт.
3. Картонная коробка – 1 шт.
4. Инструкция по применению.

MiAPlan

Express

НАБОР ТЕСТОВ НА ОВУЛЯЦИЮ

5 ТЕСТ-ПОЛОСОК



Для точного определения
2-х лучших дней для зачатия



20210720
02/2021
02/2024

номер серии
data изготовления (MFG)
срок годности (EXP)

Производитель: ООО «ИТАЛОН ПРОДАКШН», 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, офис 317
Адрес производства: (отмечено V)
☐ Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 4, 2 этаж, Помещение 223 (138) по БТИ
☐ Runbio Biotech Co., LTD, Rongsheng Technological Zone, Univ. Road, Shantou City, 515063 Guangdong, China

Регистрационное удостоверение №
По ТУ 21.20.23-006-18023326-2021



MIAPlan 5 НАБОР ТЕСТОВ НА ОВУЛЯЦИЮ

MiAPlan

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Извлеките тест-полоску из герметичной индивидуальной упаковки.
- Погрузите тест-полоску вертикально в образец мочи концом, обозначенном стрелками на 5-10 секунд.
- Положите тест-полоску на ровную, невпитывающую, чистую поверхность.
- Считайте результат через 10 минут, но не позднее 30 минут.

УЛЬТРАЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

Позволяет выявлять ЛГ в концентрации от 25 мМЕ/мл.

ТОЧНОСТЬ БОЛЕЕ 99%

Укажет 2 лучших дня для зачатия.

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ

Результат известен уже через 10 минут.

Для профессионального применения и для самотестирования


Не применять внутри
MIAPLAN® - зарегистрированная торговая марка

Перед применением рекомендуется ознакомиться с инструкцией.

LH URINE TEST


ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ 5 ТЕСТ-ПОЛОСОК

ПРИМЕР ДЛЯ ЦИКЛА 28 ДНЕЙ

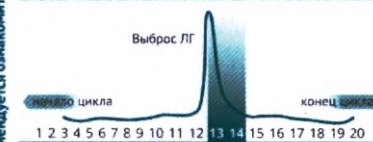

Работа тест-полоски основана на определении выброса лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче, происходящего перед овуляцией. В следующие за ним 48 часов вероятность зачатия максимальна.

Срок хранения 36 месяцев в заводской упаковке.
Хранить в оригинальных и вентилируемых помещениях и транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской упаковке.
Эксплуатировать при температуре 10-30°C.
Использовать стабильно в течение 1 часа после вскрытия индивидуальной упаковки.

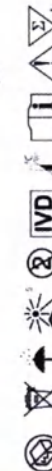

...и в настоящее время в России не существует ни одного государственного органа, который бы занимался исключительно вопросами защиты прав потребителей.

КОМПЛЕКТ 5 ТЕСТОВ

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

Тест-полоска в струйной кассете для качественного иммунохроматографического определения лютеинизирующего гормона (ЛГ/ЛН) в моче человека для определения овуляции 6,0 мм в составе:

- 1.Тест-полоска – 5 шт.
- 2.Фольгированный пакет – 5 шт.
- 3.Картонная коробка – 1 шт.
- 4.Инструкция по применению.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для определения дней, когда вероятность зачатия ребенка максимальна.

Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования	Длина цикла в днях	Дни цикла для начала тестирования
21	День 6	31	День 14
22	День 6	32	День 15
23	День 7	33	День 16
24	День 7	34	День 17
25	День 8	35	День 18
26	День 9	36	День 19
27	День 10	37	День 20
28	День 11	38	День 21
29	День 12		
30	День 13		

Например, если длина Вашего обычного цикла 26 дней, то тестироваться с 9 дня.

Принцип тестирования основан на определении количества роста потенцизирующего гормона (ЛГ). Чувствительность теста 25 мМЕ/мл ЛГ в моче. Обычно овуляция наступает примерно от 24 до 48 часов после начала повышения уровня ЛГ гормона. Этот промежуток времени и есть наиболее благоприятный для зачатия ребенка.

Да того, как начать использовать тест. Вы должны определить длину Вашего обычного менструального цикла. Длина цикла определяется как количество дней от начала одного менструации (этот день считается за первый) до начала следующей менструации (этот день не считается). Для более точного определения длины Вашего обычного цикла меланхолия имеет среднее значение трех последних циклов. Например, последние три цикла составили 24, 26 и 28 дней, среднее значение будет $(24+26+28)/3=26$ дней. После того, как Вы определили длину Вашего обычного цикла, сравните стабильность для определения дня начала тестирования.

В среднем требуется 3-5 дней ежедневного тестирования в одно и то же время. Каждый раз используйте новую тест-полоску.

Заканчивайте тестироваться, как только Вы обнаружили повышение уровня ПГ гормона (положительный результат).

по таблице вы можете определить, что необходимо начать

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



Положительный (наличие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска такой же интенсивности окраски, как и контрольная^а или темнее, чем контрольная.



Отрицательный (отсутствие повышения уровня ЛГ гормона): тестовая полоска светлее, чем контрольная или вообще не видна.

*-контрольная полоска всегда располагается в конце окошечка, ближе к ручке.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. Извлеките тест-полоску в струйной кассете из упаковки.
2. Снимите колпачок и направьте открытый впитывающий наконечник струйной кассеты вниз. Удерживайте впитывающий наконечник под струей мочи до тех пор, пока он не станет полностью влажным (около 5-10 секунд).

ВНИМАНИЕ! По желанию можно собрать мочу в чистую и сухую емкость, а затем погрузить в ней только выплывающий наконечник струйного теста на 5-10 секунд.

3. Положите струйную кассету на ровную, чистую поверхность.

Не применять, снаружи.

 Номер серии (LOT): 20210215
 Дата изготовления (MFG): 02/2021
 Срок годности (EXP): 02/2024



Бондарицкий, ООО «Атлант продажи»,
141933, Московская область, г. Дубна, ул.
Богатырева, д. 4, стр. 2 офис 317
Адрес: прохвостов (офис-90/1)
Россия, 141933, Московская область, г.
Дубна, ул. Богатырева, д. 4, стр. 2,
этаж: Прохвостов 223 (138) БТИ

Harbo Science Co., LTD, Rongsheng
Technological Zone, Ying River, Suzhou
City, 215165, Jiangsu Province, China

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 23 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»
_____ Фомина Н.В.

