

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

01129287

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



234403A0/007755

号码 No.

兹证明：在所附声明上的广东博迈医疗科技股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of
BROS MED MEDICAL CO., LTD. on the annexed DECLARATION is
genuine.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Chen Jing

日期: 2023年02月09日

(Date: Feb. 09, 2023)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>



BrosMed Medical Co., Ltd
15th Building, SMEs Venture Park SongShan Lake
Hi-Tech Industrial Development Zone
Dongguan, 523808 China

Утверждаю
Генеральный директор
BrosMed Medical Co., Ltd.
Li Bin



07.02.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Катетер баллонный дилатационный периферический»

BrosMed Medical Co., Ltd. («БросМед Медикал Ко., Лтд»), Китай

2023



Оглавление

1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация.....	3
Название изделия	3
Производитель	12
Место производства	12
2. Назначение и применения изделия.....	13
Назначение	13
Вид контакта с организмом.....	13
Способ применения.....	13
Условия применения	13
3. Особые свойства изделия.....	13
Описание изделия.....	13
4. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты	16
Показания:.....	16
Противопоказания:	16
Потенциальные осложнения:	16
Предупреждения:.....	16
5. Меры предосторожности	18
6. Инструкция по применению	19
6.1 Подготовка к использованию	19
6.2 Инструкция по применению	20
6.2.1 Техника введения.....	20
6.2.2 Надувание баллона	20
6.2.3 Удаление катетера баллонного дилатационного периферического.....	20
6.2.4 Инструмент для повторного сворачивания	21
7. Техническая спецификация.....	21
Комплект поставки изделия	94
8. Маркировка и упаковка	95
9. Соответствие стандартам Российской Федерации	96
10. Транспортирование, хранение и эксплуатация	96
11. Сведения о стерильности изделия	97
12. Сведения об утилизации	97
13. Гарантии	97



1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация

Название изделия

«Катетер баллонный дилатационный периферический» (далее по тексту – изделие, катетер).

Катетер баллонный дилатационный периферический, варианты исполнения:

1. Катетер баллонный дилатационный Tri-Wedge PTA Scoring (далее по тексту – Tri-Wedge PTA Scoring):

21-18S32, 21-18S33, 21-18S34, 21-18S36, 21-18S42, 21-18S43, 21-18S44, 21-18S46, 21-18S52, 21-18S53, 21-18S54, 21-18S56, 21-18S62, 21-18S63, 21-18S64, 21-18S66, 21-18S72, 21-18S73, 21-18S74, 21-18S76, 21-18S82, 21-18S83, 21-18S84, 21-18S86, 21-18L32, 21-18L33, 21-18L34, 21-18L36, 21-18L42, 21-18L43, 21-18L44, 21-18L46, 21-18L52, 21-18L53, 21-18L54, 21-18L56, 21-18L62, 21-18L63, 21-18L64, 21-18L66, 21-18L72, 21-18L73, 21-18L74, 21-18L76, 21-18L82, 21-18L83, 21-18L84, 21-18L86, 21-35S32, 21-35S33, 21-35S34, 21-35S36, 21-35S42, 21-35S43, 21-35S44, 21-35S46, 21-35S52, 21-35S53, 21-35S54, 21-35S56, 21-35S62, 21-35S63, 21-35S64, 21-35S66, 21-35S72, 21-35S73, 21-35S74, 21-35S76, 21-35S82, 21-35S83, 21-35S84, 21-35S86, 21-35L32, 21-35L33, 21-35L34, 21-35L36, 21-35L42, 21-35L43, 21-35L44, 21-35L46, 21-35L52, 21-35L53, 21-35L54, 21-35L56, 21-35L62, 21-35L63, 21-35L64, 21-35L66, 21-35L72, 21-35L73, 21-35L74, 21-35L76, 21-35L82, 21-35L83, 21-35L84, 21-35L86

2. Катетер баллонный дилатационный Polux SC PTA (далее по тексту – Polux SC PTA):

818-015005-070, 818-015010-070, 818-015015-070, 818-015020-070, 818-015030-070, 818-015040-070, 818-015060-070, 818-015080-070, 818-015100-070, 818-015120-070, 818-015150-070, 818-015200-070, 818-025005-070, 818-025010-070, 818-025015-070, 818-025020-070, 818-025030-070, 818-025040-070, 818-025060-070, 818-025080-070, 818-025100-070, 818-025120-070, 818-025150-070, 818-025200-070, 818-035005-070, 818-035010-070, 818-035015-070, 818-035020-070, 818-035030-070, 818-035040-070, 818-035060-070, 818-035080-070, 818-035100-070, 818-035120-070, 818-035150-070, 818-035200-070, 818-045005-070, 818-045010-070, 818-045015-070, 818-045020-070, 818-045030-070, 818-045040-070, 818-045060-070, 818-045080-070, 818-045100-070, 818-045120-070, 818-045150-070, 818-045200-070, 818-055005-070, 818-055010-070, 818-055015-070, 818-055020-070, 818-055030-070, 818-055040-070, 818-055060-070, 818-055080-070, 818-055100-070, 818-055120-070, 818-055150-070, 818-055200-070, 818-015005-090, 818-015010-090, 818-015015-090, 818-015020-090, 818-015030-090, 818-015040-090, 818-015060-090, 818-015080-090, 818-015100-090, 818-015120-090, 818-015150-090, 818-015200-090, 818-025005-090, 818-025010-090, 818-025015-090, 818-025020-090, 818-025030-090, 818-025040-090, 818-025060-090, 818-025080-090, 818-025100-090, 818-025120-090, 818-025150-090, 818-025200-090, 818-035005-090, 818-035010-090, 818-035015-090, 818-035020-090, 818-035030-090, 818-035040-090, 818-035060-090, 818-035080-090, 818-035100-090, 818-035120-090, 818-035150-090, 818-035200-090, 818-045005-090, 818-045010-090, 818-045015-090, 818-045020-090, 818-045030-090, 818-045040-090, 818-045060-090, 818-045080-090, 818-045100-090, 818-045120-090, 818-045150-090, 818-045200-090, 818-055005-090, 818-055010-090, 818-055015-090, 818-055020-090, 818-055030-090, 818-055040-090, 818-055060-090, 818-055080-090, 818-055100-090, 818-055120-090, 818-055150-090, 818-055200-090,



818-015005-150, 818-015010-150, 818-015015-150, 818-015020-150, 818-015030-150,
818-015040-150, 818-015060-150, 818-015080-150, 818-015100-150, 818-015120-150,
818-015150-150, 818-015200-150, 818-025005-150, 818-025010-150, 818-025015-150,
818-025020-150, 818-025030-150, 818-025040-150, 818-025060-150, 818-025080-150,
818-025100-150, 818-025120-150, 818-025150-150, 818-025200-150, 818-035005-150,
818-035010-150, 818-035015-150, 818-035020-150, 818-035030-150, 818-035040-150,
818-035060-150, 818-035080-150, 818-035100-150, 818-035120-150, 818-035150-150,
818-035200-150, 818-045005-150, 818-045010-150, 818-045015-150, 818-045020-150,
818-045030-150, 818-045040-150, 818-045060-150, 818-045080-150, 818-045100-150,
818-045120-150, 818-045150-150, 818-045200-150, 818-055005-150, 818-055010-150,
818-055015-150, 818-055020-150, 818-055030-150, 818-055040-150, 818-055060-150,
818-055080-150, 818-055100-150, 818-055120-150, 818-055150-150, 818-055200-150,
818-020005-070, 818-020010-070, 818-020015-070, 818-020020-070, 818-020030-070,
818-020040-070, 818-020060-070, 818-020080-070, 818-020100-070, 818-020120-070,
818-020150-070, 818-020200-070, 818-030005-070, 818-030010-070, 818-030015-070,
818-030020-070, 818-030030-070, 818-030040-070, 818-030060-070, 818-030080-070,
818-030100-070, 818-030120-070, 818-030150-070, 818-030200-070, 818-040005-070,
818-040010-070, 818-040015-070, 818-040020-070, 818-040030-070, 818-040040-070,
818-040060-070, 818-040080-070, 818-040100-070, 818-040120-070, 818-040150-070,
818-040200-070, 818-050005-070, 818-050010-070, 818-050015-070, 818-050020-070,
818-050030-070, 818-050040-070, 818-050060-070, 818-050080-070, 818-050100-070,
818-050120-070, 818-050150-070, 818-050200-070, 818-060005-070, 818-060010-070,
818-060015-070, 818-060020-070, 818-060030-070, 818-060040-070, 818-060060-070,
818-060080-070, 818-060100-070, 818-060120-070, 818-060150-070, 818-060200-070,
818-020005-090, 818-020010-090, 818-020015-090, 818-020020-090, 818-020030-090,
818-020040-090, 818-020060-090, 818-020080-090, 818-020100-090, 818-020120-090,
818-020150-090, 818-020200-090, 818-030005-090, 818-030010-090, 818-030015-090,
818-030020-090, 818-030030-090, 818-030040-090, 818-030060-090, 818-030080-090,
818-030100-090, 818-030120-090, 818-030150-090, 818-030200-090, 818-040005-090,
818-040010-090, 818-040015-090, 818-040020-090, 818-040030-090, 818-040040-090,
818-040060-090, 818-040080-090, 818-040100-090, 818-040120-090, 818-040150-090,
818-040200-090, 818-050005-090, 818-050010-090, 818-050015-090, 818-050020-090,
818-050030-090, 818-050040-090, 818-050060-090, 818-050080-090, 818-050100-090,
818-050120-090, 818-050150-090, 818-050200-090, 818-060005-090, 818-060010-090,
818-060015-090, 818-060020-090, 818-060030-090, 818-060040-090, 818-060060-090,
818-060080-090, 818-060100-090, 818-060120-090, 818-060150-090, 818-060200-090,
818-020005-150, 818-020010-150, 818-020015-150, 818-020020-150, 818-020030-150,
818-020040-150, 818-020060-150, 818-020080-150, 818-020100-150, 818-020120-150,
818-020150-150, 818-020200-150, 818-030005-150, 818-030010-150, 818-030015-150,
818-030020-150, 818-030030-150, 818-030040-150, 818-030060-150, 818-030080-150,
818-030100-150, 818-030120-150, 818-030150-150, 818-030200-150, 818-040005-150,
818-040010-150, 818-040015-150, 818-040020-150, 818-040030-150, 818-040040-150,
818-040060-150, 818-040080-150, 818-040100-150, 818-040120-150, 818-040150-150,
818-040200-150, 818-050005-150, 818-050010-150, 818-050015-150, 818-050020-150,



818-050030-150, 818-050040-150, 818-050060-150, 818-050080-150, 818-050100-150,
818-050120-150, 818-050150-150, 818-050200-150, 818-060005-150, 818-060010-150,
818-060015-150, 818-060020-150, 818-060030-150, 818-060040-150, 818-060060-150,
818-060080-150, 818-060100-150, 818-060120-150, 818-060150-150, 818-060200-150

3. Катетер баллонный дилатационный Minerva SC PTA (далее по тексту – Minerva SC PTA):

803-030020-040, 803-035020-040, 803-040020-040, 803-045020-040, 803-050020-040,
803-055020-040, 803-060020-040, 803-070020-040, 803-080020-040, 803-030040-040,
803-035040-040, 803-040040-040, 803-045040-040, 803-050040-040, 803-055040-040,
803-060040-040, 803-070040-040, 803-080040-040, 803-015005-070, 803-015010-070,
803-015015-070, 803-015020-070, 803-015030-070, 803-015040-070, 803-015060-070,
803-015080-070, 803-015100-070, 803-015120-070, 803-015150-070, 803-015200-070,
803-025005-070, 803-025010-070, 803-025015-070, 803-025020-070, 803-025030-070,
803-025040-070, 803-025060-070, 803-025080-070, 803-025100-070, 803-025120-070,
803-025150-070, 803-025200-070, 803-035005-070, 803-035010-070, 803-035015-070,
803-035020-070, 803-035030-070, 803-035040-070, 803-035060-070, 803-035080-070,
803-035100-070, 803-035120-070, 803-035150-070, 803-035200-070, 803-045005-070,
803-045010-070, 803-045015-070, 803-045020-070, 803-045030-070, 803-045040-070,
803-045060-070, 803-045080-070, 803-045100-070, 803-045120-070, 803-045150-070,
803-045200-070, 803-055005-070, 803-055010-070, 803-055015-070, 803-055020-070,
803-055030-070, 803-055040-070, 803-055060-070, 803-055080-070, 803-055100-070,
803-055120-070, 803-055150-070, 803-055200-070, 803-070005-070, 803-070010-070,
803-070015-070, 803-070020-070, 803-070030-070, 803-070040-070, 803-070060-070,
803-070080-070, 803-070100-070, 803-070120-070, 803-070150-070, 803-070200-070,
803-090005-070, 803-090010-070, 803-090015-070, 803-090020-070, 803-090030-070,
803-090040-070, 803-090060-070, 803-090080-070, 803-090100-070, 803-090120-070,
803-090150-070, 803-090200-070, 803-015005-090, 803-015010-090, 803-015015-090,
803-015020-090, 803-015030-090, 803-015040-090, 803-015060-090, 803-015080-090,
803-015100-090, 803-015120-090, 803-015150-090, 803-015200-090, 803-025005-090,
803-025010-090, 803-025015-090, 803-025020-090, 803-025030-090, 803-025040-090,
803-025060-090, 803-025080-090, 803-025100-090, 803-025120-090, 803-025150-090,
803-025200-090, 803-035005-090, 803-035010-090, 803-035015-090, 803-035020-090,
803-035030-090, 803-035040-090, 803-035060-090, 803-035080-090, 803-035100-090,
803-035120-090, 803-035150-090, 803-035200-090, 803-045005-090, 803-045010-090,
803-045015-090, 803-045020-090, 803-045030-090, 803-045040-090, 803-045060-090,
803-045080-090, 803-045100-090, 803-045120-090, 803-045150-090, 803-045200-090,
803-055005-090, 803-055010-090, 803-055015-090, 803-055020-090, 803-055030-090,
803-055040-090, 803-055060-090, 803-055080-090, 803-055100-090, 803-055120-090,
803-055150-090, 803-055200-090, 803-070005-090, 803-070010-090, 803-070015-090,
803-070020-090, 803-070030-090, 803-070040-090, 803-070060-090, 803-070080-090,
803-070100-090, 803-070120-090, 803-070150-090, 803-070200-090, 803-090005-090,
803-090010-090, 803-090015-090, 803-090020-090, 803-090030-090, 803-090040-090,
803-090060-090, 803-090080-090, 803-090100-090, 803-090120-090, 803-090150-090,
803-090200-090, 803-015005-150, 803-015010-150, 803-015015-150, 803-015020-150,



803-015030-150, 803-015040-150, 803-015060-150, 803-015080-150, 803-015100-150,
803-015120-150, 803-015150-150, 803-015200-150, 803-025005-150, 803-025010-150,
803-025015-150, 803-025020-150, 803-025030-150, 803-025040-150, 803-025060-150,
803-025080-150, 803-025100-150, 803-025120-150, 803-025150-150, 803-025200-150,
803-035005-150, 803-035010-150, 803-035015-150, 803-035020-150, 803-035030-150,
803-035040-150, 803-035060-150, 803-035080-150, 803-035100-150, 803-035120-150,
803-035150-150, 803-035200-150, 803-045005-150, 803-045010-150, 803-045015-150,
803-045020-150, 803-045030-150, 803-045040-150, 803-045060-150, 803-045080-150,
803-045100-150, 803-045120-150, 803-045150-150, 803-045200-150, 803-055005-150,
803-055010-150, 803-055015-150, 803-055020-150, 803-055030-150, 803-055040-150,
803-055060-150, 803-055080-150, 803-055100-150, 803-055120-150, 803-055150-150,
803-055200-150, 803-070005-150, 803-070010-150, 803-070015-150, 803-070020-150,
803-070030-150, 803-070040-150, 803-070060-150, 803-070080-150, 803-070100-150,
803-070120-150, 803-070150-150, 803-070200-150, 803-090005-150, 803-090010-150,
803-090015-150, 803-090020-150, 803-090030-150, 803-090040-150, 803-090060-150,
803-090080-150, 803-090100-150, 803-090120-150, 803-090150-150, 803-090200-150,
803-030030-040, 803-035030-040, 803-040030-040, 803-045030-040, 803-050030-040,
803-055030-040, 803-060030-040, 803-070030-040, 803-080030-040, 803-030060-040,
803-035060-040, 803-040060-040, 803-045060-040, 803-050060-040, 803-055060-040,
803-060060-040, 803-070060-040, 803-080060-040, 803-020005-070, 803-020010-070,
803-020015-070, 803-020020-070, 803-020030-070, 803-020040-070, 803-020060-070,
803-020080-070, 803-020100-070, 803-020120-070, 803-020150-070, 803-020200-070,
803-030005-070, 803-030010-070, 803-030015-070, 803-030020-070, 803-030030-070,
803-030040-070, 803-030060-070, 803-030080-070, 803-030100-070, 803-030120-070,
803-030150-070, 803-030200-070, 803-040005-070, 803-040010-070, 803-040015-070,
803-040020-070, 803-040030-070, 803-040040-070, 803-040060-070, 803-040080-070,
803-040100-070, 803-040120-070, 803-040150-070, 803-040200-070, 803-050005-070,
803-050010-070, 803-050015-070, 803-050020-070, 803-050030-070, 803-050040-070,
803-050060-070, 803-050080-070, 803-050100-070, 803-050120-070, 803-050150-070,
803-050200-070, 803-060005-070, 803-060010-070, 803-060015-070, 803-060020-070,
803-060030-070, 803-060040-070, 803-060060-070, 803-060080-070, 803-060100-070,
803-060120-070, 803-060150-070, 803-060200-070, 803-080005-070, 803-080010-070,
803-080015-070, 803-080020-070, 803-080030-070, 803-080040-070, 803-080060-070,
803-080080-070, 803-080100-070, 803-080120-070, 803-080150-070, 803-080200-070,
803-100005-070, 803-100010-070, 803-100015-070, 803-100020-070, 803-100030-070,
803-100040-070, 803-100060-070, 803-100080-070, 803-100100-070, 803-100120-070,
803-100150-070, 803-100200-070, 803-020005-090, 803-020010-090, 803-020015-090,
803-020020-090, 803-020030-090, 803-020040-090, 803-020060-090, 803-020080-090,
803-020100-090, 803-020120-090, 803-020150-090, 803-020200-090, 803-030005-090,
803-030010-090, 803-030015-090, 803-030020-090, 803-030030-090, 803-030040-090,
803-030060-090, 803-030080-090, 803-030100-090, 803-030120-090, 803-030150-090,
803-030200-090, 803-040005-090, 803-040010-090, 803-040015-090, 803-040020-090,
803-040030-090, 803-040040-090, 803-040060-090, 803-040080-090, 803-040100-090,
803-040120-090, 803-040150-090, 803-040200-090, 803-050005-090, 803-050010-090,



803-050015-090, 803-050020-090, 803-050030-090, 803-050040-090, 803-050060-090,
803-050080-090, 803-050100-090, 803-050120-090, 803-050150-090, 803-050200-090,
803-060005-090, 803-060010-090, 803-060015-090, 803-060020-090, 803-060030-090,
803-060040-090, 803-060060-090, 803-060080-090, 803-060100-090, 803-060120-090,
803-060150-090, 803-060200-090, 803-080005-090, 803-080010-090, 803-080015-090,
803-080020-090, 803-080030-090, 803-080040-090, 803-080060-090, 803-080080-090,
803-080100-090, 803-080120-090, 803-080150-090, 803-080200-090, 803-100005-090,
803-100010-090, 803-100015-090, 803-100020-090, 803-100030-090, 803-100040-090,
803-100060-090, 803-100080-090, 803-100100-090, 803-100120-090, 803-100150-090,
803-100200-090, 803-020005-150, 803-020010-150, 803-020015-150, 803-020020-150,
803-020030-150, 803-020040-150, 803-020060-150, 803-020080-150, 803-020100-150,
803-020120-150, 803-020150-150, 803-020200-150, 803-030005-150, 803-030010-150,
803-030015-150, 803-030020-150, 803-030030-150, 803-030040-150, 803-030060-150,
803-030080-150, 803-030100-150, 803-030120-150, 803-030150-150, 803-030200-150,
803-040005-150, 803-040010-150, 803-040015-150, 803-040020-150, 803-040030-150,
803-040040-150, 803-040060-150, 803-040080-150, 803-040100-150, 803-040120-150,
803-040150-150, 803-040200-150, 803-050005-150, 803-050010-150, 803-050015-150,
803-050020-150, 803-050030-150, 803-050040-150, 803-050060-150, 803-050080-150,
803-050100-150, 803-050120-150, 803-050150-150, 803-050200-150, 803-060005-150,
803-060010-150, 803-060015-150, 803-060020-150, 803-060030-150, 803-060040-150,
803-060060-150, 803-060080-150, 803-060100-150, 803-060120-150, 803-060150-150,
803-060200-150, 803-080005-150, 803-080010-150, 803-080015-150, 803-080020-150,
803-080030-150, 803-080040-150, 803-080060-150, 803-080080-150, 803-080100-150,
803-080120-150, 803-080150-150, 803-080200-150, 803-100005-150, 803-100010-150,
803-100015-150, 803-100020-150, 803-100030-150, 803-100040-150, 803-100060-150,
803-100080-150, 803-100100-150, 803-100120-150, 803-100150-150, 803-100200-150

4. Катетер баллонный дилатационный Atropos SC PTA (далее по тексту – Atropos SC PTA):

819-030020-040, 819-040020-040, 819-050020-040, 819-060020-040, 819-070020-040,
819-080020-040, 819-030040-040, 819-040040-040, 819-050040-040, 819-060040-040,
819-070040-040, 819-080040-040, 819-030020-070, 819-030030-070, 819-030040-070,
819-030060-070, 819-030080-070, 819-030100-070, 819-030120-070, 819-030150-070,
819-030200-070, 819-050020-070, 819-050030-070, 819-050040-070, 819-050060-070,
819-050080-070, 819-050100-070, 819-050120-070, 819-050150-070, 819-050200-070,
819-070020-070, 819-070030-070, 819-070040-070, 819-070060-070, 819-070080-070,
819-070100-070, 819-070120-070, 819-070150-070, 819-070200-070, 819-090020-070,
819-090030-070, 819-090040-070, 819-090060-070, 819-090080-070, 819-090100-070,
819-090120-070, 819-090150-070, 819-090200-070, 819-030020-090, 819-030030-090,
819-030040-090, 819-030060-090, 819-030080-090, 819-030100-090, 819-030120-090,
819-030150-090, 819-030200-090, 819-050020-090, 819-050030-090, 819-050040-090,
819-050060-090, 819-050080-090, 819-050100-090, 819-050120-090, 819-050150-090,
819-050200-090, 819-070020-090, 819-070030-090, 819-070040-090, 819-070060-090,
819-070080-090, 819-070100-090, 819-070120-090, 819-070150-090, 819-070200-090,
819-090020-090, 819-090030-090, 819-090040-090, 819-090060-090, 819-090080-090,



819-090100-090, 819-090120-090, 819-090150-090, 819-090200-090, 819-030020-150, 819-030030-150, 819-030040-150, 819-030060-150, 819-030080-150, 819-030100-150, 819-030120-150, 819-030150-150, 819-030200-150, 819-050020-150, 819-050030-150, 819-050040-150, 819-050060-150, 819-050080-150, 819-050100-150, 819-050120-150, 819-050150-150, 819-050200-150, 819-070020-150, 819-070030-150, 819-070040-150, 819-070060-150, 819-070080-150, 819-070100-150, 819-070120-150, 819-070150-150, 819-070200-150, 819-090020-150, 819-090030-150, 819-090040-150, 819-090060-150, 819-090080-150, 819-090100-150, 819-090120-150, 819-090150-150, 819-090200-150, 819-030030-040, 819-040030-040, 819-050030-040, 819-060030-040, 819-070030-040, 819-080030-040, 819-030060-040, 819-040060-040, 819-050060-040, 819-060060-040, 819-070060-040, 819-080060-040, 819-040020-070, 819-040030-070, 819-040040-070, 819-040060-070, 819-040080-070, 819-040100-070, 819-040120-070, 819-040150-070, 819-040200-070, 819-060020-070, 819-060030-070, 819-060040-070, 819-060060-070, 819-060080-070, 819-060100-070, 819-060120-070, 819-060150-070, 819-060200-070, 819-080020-070, 819-080030-070, 819-080040-070, 819-080060-070, 819-080080-070, 819-080100-070, 819-080120-070, 819-080150-070, 819-080200-070, 819-100020-070, 819-100030-070, 819-100040-070, 819-100060-070, 819-100080-070, 819-100100-070, 819-100120-070, 819-100150-070, 819-100200-070, 819-040020-090, 819-040030-090, 819-040040-090, 819-040060-090, 819-040080-090, 819-040100-090, 819-040120-090, 819-040150-090, 819-040200-090, 819-060020-090, 819-060030-090, 819-060040-090, 819-060060-090, 819-060080-090, 819-060100-090, 819-060120-090, 819-060150-090, 819-060200-090, 819-080020-090, 819-080030-090, 819-080040-090, 819-080060-090, 819-080080-090, 819-080100-090, 819-080120-090, 819-080150-090, 819-080200-090, 819-100020-090, 819-100030-090, 819-100040-090, 819-100060-090, 819-100080-090, 819-100100-090, 819-100120-090, 819-100150-090, 819-100200-090, 819-040020-150, 819-040030-150, 819-040040-150, 819-040060-150, 819-040080-150, 819-040100-150, 819-040120-150, 819-040150-150, 819-040200-150, 819-060020-150, 819-060030-150, 819-060040-150, 819-060060-150, 819-060080-150, 819-060100-150, 819-060120-150, 819-060150-150, 819-060200-150, 819-080020-150, 819-080030-150, 819-080040-150, 819-080060-150, 819-080080-150, 819-080100-150, 819-080120-150, 819-080150-150, 819-080200-150, 819-100020-150, 819-100030-150, 819-100040-150, 819-100060-150, 819-100080-150, 819-100100-150, 819-100120-150, 819-100150-150, 819-100200-150

5. Катетер баллонный дилатационный Castor NC PTA (далее по тексту – Castor NC PTA):

816-020010-070, 816-020015-070, 816-020020-070, 816-020030-070, 816-020040-070, 816-020060-070, 816-020080-070, 816-020100-070, 816-020150-070, 816-030010-070, 816-030015-070, 816-030020-070, 816-030030-070, 816-030040-070, 816-030060-070, 816-030080-070, 816-030100-070, 816-030150-070, 816-040010-070, 816-040015-070, 816-040020-070, 816-040030-070, 816-040040-070, 816-040060-070, 816-040080-070, 816-040100-070, 816-040150-070, 816-050010-070, 816-050015-070, 816-050020-070, 816-050030-070, 816-050040-070, 816-050060-070, 816-050080-070, 816-050100-070, 816-050150-070, 816-060010-070, 816-060015-070, 816-060020-070, 816-060030-070, 816-060040-070, 816-060060-070, 816-060080-070, 816-060100-070, 816-060150-070, 816-080010-070, 816-080015-070, 816-080020-070, 816-080030-070, 816-080040-070,



816-080060-070, 816-080080-070, 816-080100-070, 816-080150-070, 816-025010-090,
816-025015-090, 816-025020-090, 816-025030-090, 816-025040-090, 816-025060-090,
816-025080-090, 816-025100-090, 816-025150-090, 816-035010-090, 816-035015-090,
816-035020-090, 816-035030-090, 816-035040-090, 816-035060-090, 816-035080-090,
816-035100-090, 816-035150-090, 816-045010-090, 816-045015-090, 816-045020-090,
816-045030-090, 816-045040-090, 816-045060-090, 816-045080-090, 816-045100-090,
816-045150-090, 816-055010-090, 816-055015-090, 816-055020-090, 816-055030-090,
816-055040-090, 816-055060-090, 816-055080-090, 816-055100-090, 816-055150-090,
816-070010-090, 816-070015-090, 816-070020-090, 816-070030-090, 816-070040-090,
816-070060-090, 816-070080-090, 816-070100-090, 816-070150-090, 816-020010-150,
816-020015-150, 816-020020-150, 816-020030-150, 816-020040-150, 816-020060-150,
816-020080-150, 816-020100-150, 816-020150-150, 816-030010-150, 816-030015-150,
816-030020-150, 816-030030-150, 816-030040-150, 816-030060-150, 816-030080-150,
816-030100-150, 816-030150-150, 816-040010-150, 816-040015-150, 816-040020-150,
816-040030-150, 816-040040-150, 816-040060-150, 816-040080-150, 816-040100-150,
816-040150-150, 816-050010-150, 816-050015-150, 816-050020-150, 816-050030-150,
816-050040-150, 816-050060-150, 816-050080-150, 816-050100-150, 816-050150-150,
816-060010-150, 816-060015-150, 816-060020-150, 816-060030-150, 816-060040-150,
816-060060-150, 816-060080-150, 816-060100-150, 816-060150-150, 816-080010-150,
816-080015-150, 816-080020-150, 816-080030-150, 816-080040-150, 816-080060-150,
816-080080-150, 816-080100-150, 816-080150-150, 816-025010-070, 816-025015-070,
816-025020-070, 816-025030-070, 816-025040-070, 816-025060-070, 816-025080-070,
816-025100-070, 816-025150-070, 816-035010-070, 816-035015-070, 816-035020-070,
816-035030-070, 816-035040-070, 816-035060-070, 816-035080-070, 816-035100-070,
816-035150-070, 816-045010-070, 816-045015-070, 816-045020-070, 816-045030-070,
816-045040-070, 816-045060-070, 816-045080-070, 816-045100-070, 816-045150-070,
816-055010-070, 816-055015-070, 816-055020-070, 816-055030-070, 816-055040-070,
816-055060-070, 816-055080-070, 816-055100-070, 816-055150-070, 816-070010-070,
816-070015-070, 816-070020-070, 816-070030-070, 816-070040-070, 816-070060-070,
816-070080-070, 816-070100-070, 816-070150-070, 816-020010-090, 816-020015-090,
816-020020-090, 816-020030-090, 816-020040-090, 816-020060-090, 816-020080-090,
816-020100-090, 816-020150-090, 816-030010-090, 816-030015-090, 816-030020-090,
816-030030-090, 816-030040-090, 816-030060-090, 816-030080-090, 816-030100-090,
816-030150-090, 816-040010-090, 816-040015-090, 816-040020-090, 816-040030-090,
816-040040-090, 816-040060-090, 816-040080-090, 816-040100-090, 816-040150-090,
816-050010-090, 816-050015-090, 816-050020-090, 816-050030-090, 816-050040-090,
816-050060-090, 816-050080-090, 816-050100-090, 816-050150-090, 816-060010-090,
816-060015-090, 816-060020-090, 816-060030-090, 816-060040-090, 816-060060-090,
816-060080-090, 816-060100-090, 816-060150-090, 816-080010-090, 816-080015-090,
816-080020-090, 816-080030-090, 816-080040-090, 816-080060-090, 816-080080-090,
816-080100-090, 816-080150-090, 816-025010-150, 816-025015-150, 816-025020-150,
816-025030-150, 816-025040-150, 816-025060-150, 816-025080-150, 816-025100-150,
816-025150-150, 816-035010-150, 816-035015-150, 816-035020-150, 816-035030-150,
816-035040-150, 816-035060-150, 816-035080-150, 816-035100-150, 816-035150-150,



816-045010-150, 816-045015-150, 816-045020-150, 816-045030-150, 816-045040-150, 816-045060-150, 816-045080-150, 816-045100-150, 816-045150-150, 816-055010-150, 816-055015-150, 816-055020-150, 816-055030-150, 816-055040-150, 816-055060-150, 816-055080-150, 816-055100-150, 816-055150-150, 816-070010-150, 816-070015-150, 816-070020-150, 816-070030-150, 816-070040-150, 816-070060-150, 816-070080-150, 816-070100-150, 816-070150-150

6. Катетер баллонный дилатационный Achilles NC PTA (далее по тексту – Achilles NC PTA):

804-030020-040, 804-035020-040, 804-040020-040, 804-045020-040, 804-050020-040, 804-055020-040, 804-060020-040, 804-070020-040, 804-080020-040, 804-030040-040, 804-035040-040, 804-040040-040, 804-045040-040, 804-050040-040, 804-055040-040, 804-060040-040, 804-070040-040, 804-080040-040, 804-020010-070, 804-020015-070, 804-020020-070, 804-020030-070, 804-020040-070, 804-020060-070, 804-020080-070, 804-020100-070, 804-020150-070, 804-030010-070, 804-030015-070, 804-030020-070, 804-030030-070, 804-030040-070, 804-030060-070, 804-030080-070, 804-030100-070, 804-030150-070, 804-040010-070, 804-040015-070, 804-040020-070, 804-040030-070, 804-040040-070, 804-040060-070, 804-040080-070, 804-040100-070, 804-040150-070, 804-050010-070, 804-050015-070, 804-050020-070, 804-050030-070, 804-050040-070, 804-050060-070, 804-050080-070, 804-050100-070, 804-050150-070, 804-060010-070, 804-060015-070, 804-060020-070, 804-060030-070, 804-060040-070, 804-060060-070, 804-060080-070, 804-060100-070, 804-060150-070, 804-080010-070, 804-080015-070, 804-080020-070, 804-080030-070, 804-080040-070, 804-080060-070, 804-080080-070, 804-080100-070, 804-080150-070, 804-025010-090, 804-025015-090, 804-025020-090, 804-025030-090, 804-025040-090, 804-025060-090, 804-025080-090, 804-025100-090, 804-025150-090, 804-035010-090, 804-035015-090, 804-035020-090, 804-035030-090, 804-035040-090, 804-035060-090, 804-035080-090, 804-035100-090, 804-035150-090, 804-045010-090, 804-045015-090, 804-045020-090, 804-045030-090, 804-045040-090, 804-045060-090, 804-045080-090, 804-045100-090, 804-045150-090, 804-055010-090, 804-055015-090, 804-055020-090, 804-055030-090, 804-055040-090, 804-055060-090, 804-055080-090, 804-055100-090, 804-055150-090, 804-070010-090, 804-070015-090, 804-070020-090, 804-070030-090, 804-070040-090, 804-070060-090, 804-070080-090, 804-070100-090, 804-070150-090, 804-020010-150, 804-020015-150, 804-020020-150, 804-020030-150, 804-020040-150, 804-020060-150, 804-020080-150, 804-020100-150, 804-020150-150, 804-030010-150, 804-030015-150, 804-030020-150, 804-030030-150, 804-030040-150, 804-030060-150, 804-030080-150, 804-030100-150, 804-030150-150, 804-040010-150, 804-040015-150, 804-040020-150, 804-040030-150, 804-040040-150, 804-040060-150, 804-040080-150, 804-040100-150, 804-040150-150, 804-050010-150, 804-050015-150, 804-050020-150, 804-050030-150, 804-050040-150, 804-050060-150, 804-050080-150, 804-050100-150, 804-050150-150, 804-060010-150, 804-060015-150, 804-060020-150, 804-060030-150, 804-060040-150, 804-060060-150, 804-060080-150, 804-060100-150, 804-060150-150, 804-080010-150, 804-080015-150, 804-080020-150, 804-080030-150, 804-080040-150, 804-080060-150, 804-080080-150, 804-080100-150, 804-080150-150, 804-030030-040, 804-035030-040, 804-040030-040, 804-045030-040, 804-050030-040, 804-055030-040, 804-060030-040, 804-070030-040, 804-080030-040,



804-030060-040, 804-035060-040, 804-040060-040, 804-045060-040, 804-050060-040,
804-055060-040, 804-060060-040, 804-070060-040, 804-080060-040, 804-025010-070,
804-025015-070, 804-025020-070, 804-025030-070, 804-025040-070, 804-025060-070,
804-025080-070, 804-025100-070, 804-025150-070, 804-035010-070, 804-035015-070,
804-035020-070, 804-035030-070, 804-035040-070, 804-035060-070, 804-035080-070,
804-035100-070, 804-035150-070, 804-045010-070, 804-045015-070, 804-045020-070,
804-045030-070, 804-045040-070, 804-045060-070, 804-045080-070, 804-045100-070,
804-045150-070, 804-055010-070, 804-055015-070, 804-055020-070, 804-055030-070,
804-055040-070, 804-055060-070, 804-055080-070, 804-055100-070, 804-055150-070,
804-070010-070, 804-070015-070, 804-070020-070, 804-070030-070, 804-070040-070,
804-070060-070, 804-070080-070, 804-070100-070, 804-070150-070, 804-020010-090,
804-020015-090, 804-020020-090, 804-020030-090, 804-020040-090, 804-020060-090,
804-020080-090, 804-020100-090, 804-020150-090, 804-030010-090, 804-030015-090,
804-030020-090, 804-030030-090, 804-030040-090, 804-030060-090, 804-030080-090,
804-030100-090, 804-030150-090, 804-040010-090, 804-040015-090, 804-040020-090,
804-040030-090, 804-040040-090, 804-040060-090, 804-040080-090, 804-040100-090,
804-040150-090, 804-050010-090, 804-050015-090, 804-050020-090, 804-050030-090,
804-050040-090, 804-050060-090, 804-050080-090, 804-050100-090, 804-050150-090,
804-060010-090, 804-060015-090, 804-060020-090, 804-060030-090, 804-060040-090,
804-060060-090, 804-060080-090, 804-060100-090, 804-060150-090, 804-080010-090,
804-080015-090, 804-080020-090, 804-080030-090, 804-080040-090, 804-080060-090,
804-080080-090, 804-080100-090, 804-080150-090, 804-025010-150, 804-025015-150,
804-025020-150, 804-025030-150, 804-025040-150, 804-025060-150, 804-025080-150,
804-025100-150, 804-025150-150, 804-035010-150, 804-035015-150, 804-035020-150,
804-035030-150, 804-035040-150, 804-035060-150, 804-035080-150, 804-035100-150,
804-035150-150, 804-045010-150, 804-045015-150, 804-045020-150, 804-045030-150,
804-045040-150, 804-045060-150, 804-045080-150, 804-045100-150, 804-045150-150,
804-055010-150, 804-055015-150, 804-055020-150, 804-055030-150, 804-055040-150,
804-055060-150, 804-055080-150, 804-055100-150, 804-055150-150, 804-070010-150,
804-070015-150, 804-070020-150, 804-070030-150, 804-070040-150, 804-070060-150,
804-070080-150, 804-070100-150, 804-070150-150

7. Катетер баллонный дилатационный Hermes NC PTA (далее по тексту – Hermes NC PTA):

820-030020-040, 820-040020-040, 820-050020-040, 820-060020-040, 820-070020-040,
820-080020-040, 820-030040-040, 820-040040-040, 820-050040-040, 820-060040-040,
820-070040-040, 820-080040-040, 820-030020-070, 820-030030-070, 820-030040-070,
820-030060-070, 820-030080-070, 820-030100-070, 820-030150-070, 820-050020-070,
820-050030-070, 820-050040-070, 820-050060-070, 820-050080-070, 820-050100-070,
820-050150-070, 820-070020-070, 820-070030-070, 820-070040-070, 820-070060-070,
820-070080-070, 820-070100-070, 820-070150-070, 820-090020-070, 820-090030-070,
820-090040-070, 820-090060-070, 820-090080-070, 820-090100-070, 820-090150-070,
820-030020-090, 820-030030-090, 820-030040-090, 820-030060-090, 820-030080-090,
820-030100-090, 820-030150-090, 820-050020-090, 820-050030-090, 820-050040-090,
820-050060-090, 820-050080-090, 820-050100-090, 820-050150-090, 820-070020-090,



820-070030-090, 820-070040-090, 820-070060-090, 820-070080-090, 820-070100-090,
820-070150-090, 820-090020-090, 820-090030-090, 820-090040-090, 820-090060-090,
820-090080-090, 820-090100-090, 820-090150-090, 820-030020-150, 820-030030-150,
820-030040-150, 820-030060-150, 820-030080-150, 820-030100-150, 820-030150-150,
820-050020-150, 820-050030-150, 820-050040-150, 820-050060-150, 820-050080-150,
820-050100-150, 820-050150-150, 820-070020-150, 820-070030-150, 820-070040-150,
820-070060-150, 820-070080-150, 820-070100-150, 820-070150-150, 820-090020-150,
820-090030-150, 820-090040-150, 820-090060-150, 820-090080-150, 820-090100-150,
820-090150-150, 820-030030-040, 820-040030-040, 820-050030-040, 820-060030-040,
820-070030-040, 820-080030-040, 820-030060-040, 820-040060-040, 820-050060-040,
820-060060-040, 820-070060-040, 820-080060-040, 820-040020-070, 820-040030-070,
820-040040-070, 820-040060-070, 820-040080-070, 820-040100-070, 820-040150-070,
820-060020-070, 820-060030-070, 820-060040-070, 820-060060-070, 820-060080-070,
820-060100-070, 820-060150-070, 820-080020-070, 820-080030-070, 820-080040-070,
820-080060-070, 820-080080-070, 820-080100-070, 820-080150-070, 820-100020-070,
820-100030-070, 820-100040-070, 820-100060-070, 820-100080-070, 820-100100-070,
820-100150-070, 820-040020-090, 820-040030-090, 820-040040-090, 820-040060-090,
820-040080-090, 820-040100-090, 820-040150-090, 820-060020-090, 820-060030-090,
820-060040-090, 820-060060-090, 820-060080-090, 820-060100-090, 820-060150-090,
820-080020-090, 820-080030-090, 820-080040-090, 820-080060-090, 820-080080-090,
820-080100-090, 820-080150-090, 820-100020-090, 820-100030-090, 820-100040-090,
820-100060-090, 820-100080-090, 820-100100-090, 820-100150-090, 820-040020-150,
820-040030-150, 820-040040-150, 820-040060-150, 820-040080-150, 820-040100-150,
820-040150-150, 820-060020-150, 820-060030-150, 820-060040-150, 820-060060-150,
820-060080-150, 820-060100-150, 820-060150-150, 820-080020-150, 820-080030-150,
820-080040-150, 820-080060-150, 820-080080-150, 820-080100-150, 820-080150-150,
820-100020-150, 820-100030-150, 820-100040-150, 820-100060-150, 820-100080-150,
820-100100-150, 820-100150-150

Производитель

BrosMed Medical Co., Ltd. («БросМед Медикал Ко., Лтд»), Китай
15th Building, SMEs Venture Park, SongShan Lake Hi-tech Industrial Development Zone,
Dongguan, Guangdong, 523808, China

Телефон: +86 (769) 2289 2018

Факс: +86 (769) 2289 2016

E-mail: crystallee@brosmed.com

Место производства

BrosMed Medical Co., Ltd.,
15th Building, SMEs Venture Park, SongShan Lake Hi-tech Industrial Development Zone,
Dongguan, Guangdong, 523808, China

2. Назначение и применения изделия

Назначение

Изделие предназначено для расширения стенозов подвздошной, бедренной, подвздошно-бедренной, подколенной, инфрапоплитеальной и почечной артерий, а также для лечения обструктивных поражений нативных или синтетических артериовенозных диализных свищей. Изделие показано для последующего развертывания стента в периферической сосудистой сети.

Вид контакта с организмом

Катетер баллонный дилатационный периферический: Кратковременный (менее 24 часов) контакт с циркулирующей кровью и мягкими тканями.

Способ применения

В соответствии с инструкцией по применению.

Условия применения

Катетер баллонный дилатационный периферический должен применяться только в больницах, имеющих возможность проведения неотложной операции аортокоронарного шунтирования, специалистами, обладающими квалификацией хирургов и рентгенологов одновременно и умеющими работать со сложной медицинской аппаратурой.

3. Особые свойства изделия

Описание изделия

Катетер баллонный дилатационный периферический в вариантах исполнения Polux SC PTA (0,014 дюйма (0.36 мм)), Minerva SC PTA (0,018 дюйма (0.46 мм)) и Atropos SC PTA (0,035 дюйма (0.89 мм)), Castor NC PTA (0,014 дюйма (0.36мм)), Achilles NC PTA (0,018 дюйма (0.46 мм)) и Hermes NC PTA (0,035 дюйма(0.89 мм)) - представляет собой периферийное изделие, баллонный катетер типа Over-The-Wire (OTW) характеризующийся наличием двух просветов, специально разработанный для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА). Различия в вариантах исполнения катетера баллонного дилатационного периферического только в совместимости направляющих проводников и конфигурации баллона, которые контролировались в процессе Проверки конструкции. Катетер баллонный дилатационный периферический— это коаксиальный двухпросветный катетер с баллоном, расположенным на дистальном конце изделия. Один просвет используется для надувания баллона и доступен через порт боковой Y-образной канюли. Второй просвет, через прямое входное отверстие Y-образной канюли, обеспечивает доступ к дистальному концу катетера для проводника. Баллон имеет рентгеноконтрастные маркерные полосы для позиционирования баллона относительно стеноза. Рентгеноконтрастные маркерные полосы указывают на расширяемую часть баллона и помогают в установке баллона. Конструкция катетера баллонного дилатационного периферического не имеет просвета для дистальных инъекций красителя или измерения дистального давления.

Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring, представляет собой периферический баллонный дилатационный катетер типа Over-The-Wire (OTW) характеризующийся наличием двух просветов.

Коаксиальную двухпросветную часть shaft катетера для надувания баллона и введения проводника прикрепляют к Y-образной канюле. Баллон и коаксиальная двухпросветная часть shaft свариваются и составляют дистальную часть катетера. Параллельно баллону прикреплен каркас из трех разрезающих кромок. Баллон имеет рентгеноконтрастные маркеры для позиционирования баллона относительно стеноза. Просвет проводника совместим со стандартным проводником 0,018 дюйма (0,46 мм) или 0,035 дюйма (0,89 мм), который входит через прямое входное отверстие Y-образной канюли.

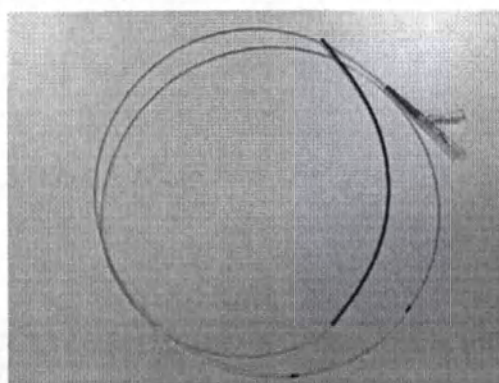
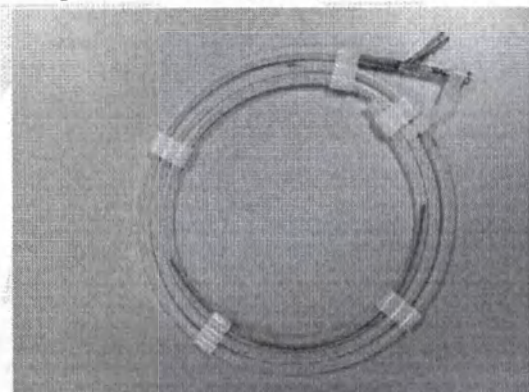


Рисунок 3.1 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Polux SC PTA

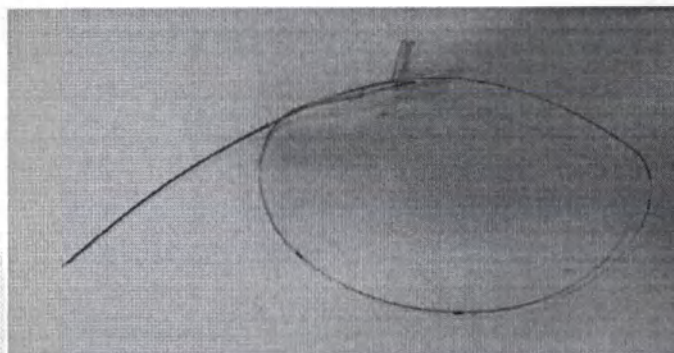
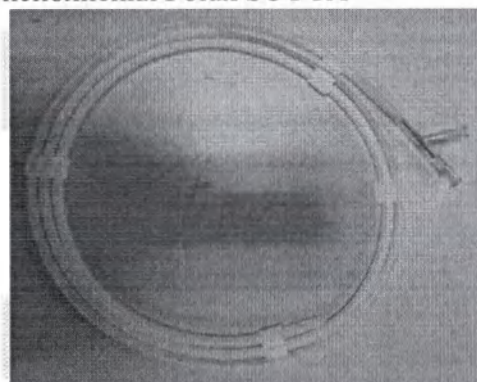


Рисунок 3.2 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Minerva SC PTA

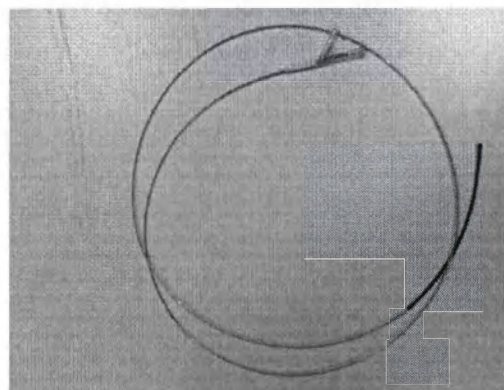
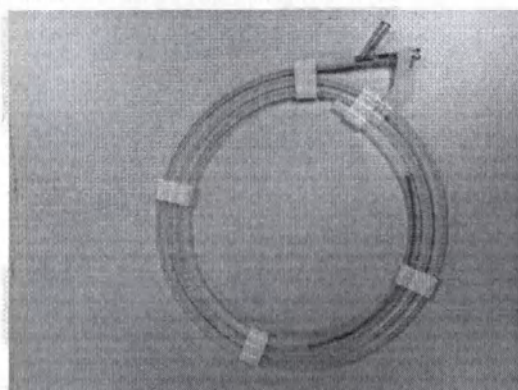


Рисунок 3.3 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Atropos SC PTA

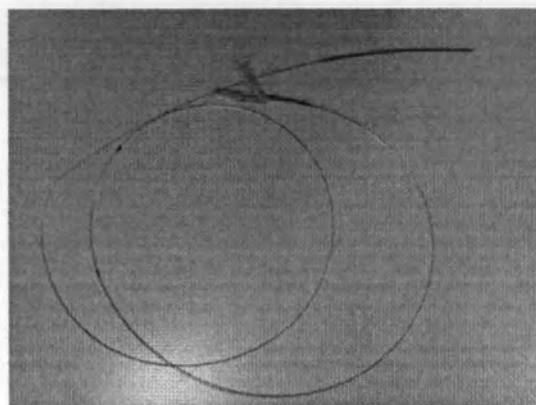
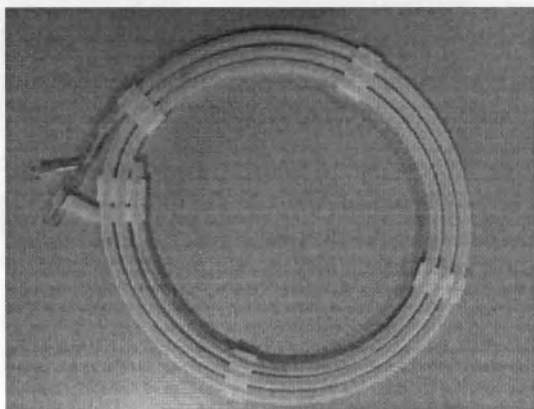


Рисунок 3.4 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Castor NC PTA

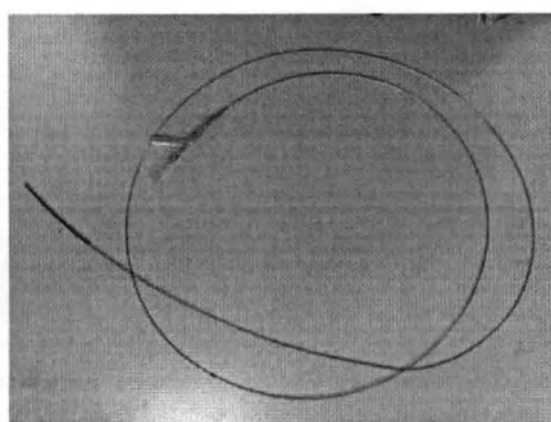
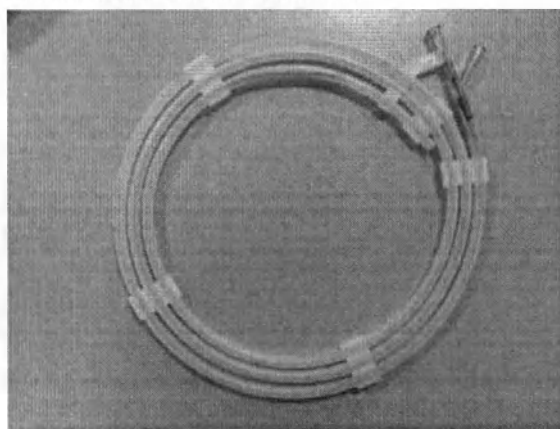


Рисунок 3.5 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Achilles NC PTA

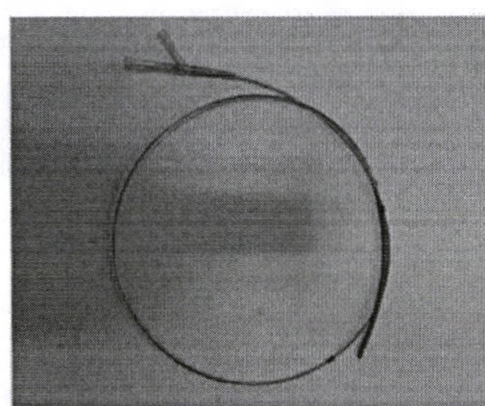
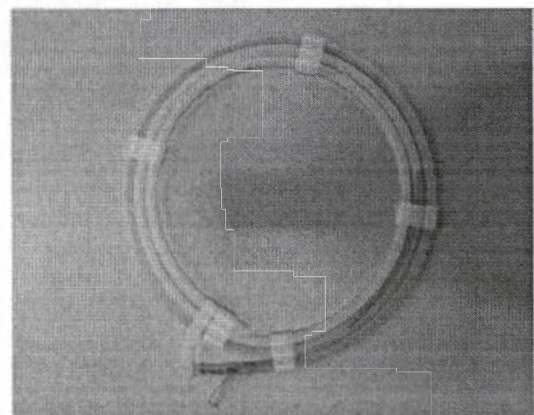


Рисунок 3.6 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Hermes NC PTA

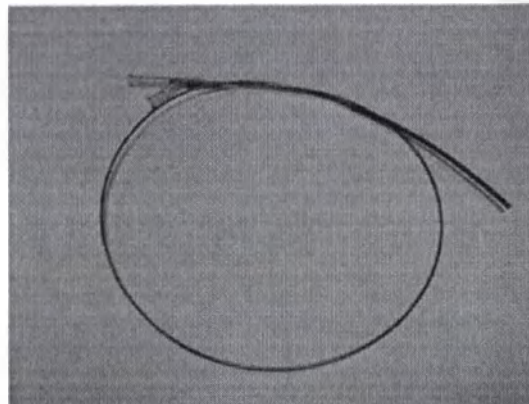
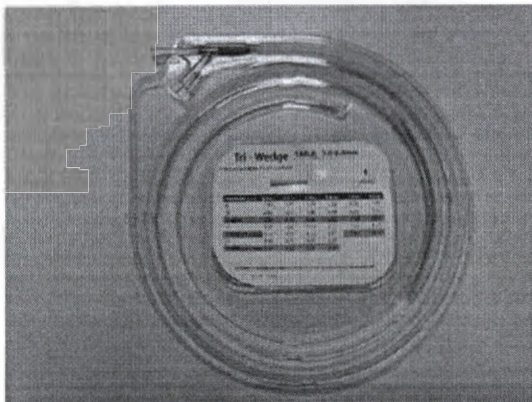


Рисунок 3.7 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring

4. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты

Показания:

- Катетер баллонный дилатационный периферический предназначен для расширения стенозов подвздошной, бедренной, подвздошно-бедренной, подколенной, инфрапоплитеальной и почечной артерий, а также для лечения обструктивных поражений нативных или синтетических артериовенозных диализных свищей.
- Изделие показано для последующего развертывания стента в периферической сосудистой сети.

Противопоказания:

Катетер баллонный дилатационный периферический противопоказан для использования в коронарных артериях или нервно-сосудистой сети. Он также противопоказан при невозможности пересечь целевое поражение с помощью проводника.

Потенциальные осложнения:

Осложнения, связанные с использованием катетера баллонного дилатационного периферического, аналогичны осложнениям, связанным со стандартными процедурами ЧТА. Возможные нежелательные эффекты включают:

- Местная гематома
- Местное кровоизлияние
- Местные или дистальные тромбозмболические эпизоды
- Тромбоз
- Артериовенозный свищ
- Псевдоаневризма
- Местные инфекции

- Острая реокклюзия, требующая хирургического вмешательства
- Рассечение стенки расширенной артерии
- Перфорация стенки артерии
- Длительные спазмы
- Рестеноз расширенной артерии
- Полная окклюзия периферической артерии
- Аллергическая реакция на контрастную среду
- Аритмии
- Смерть
- Лекарственные реакции
- Эндокардит
- Гипотония или гипертензия
- Боль и чувствительность
- Сепсис / инфекция
- Кратковременное ухудшение гемодинамики
- Системная эмболизация
- Стенокардия или коронарная ишемия или инфаркт миокарда;
- Лихорадочное состояние
- Синдром гиперперфузии
- Почечная недостаточность или осложнение
- Транзиторная ишемическая атака или Инсульт
- Шок
- Ампутация целевой конечности (ампутация пальца ноги, ступни и (или) ноги)
- пневмоторакс или гемоторакс

Предупреждения:

1. Катетер баллонный дилатационный периферический не предназначен для артерий.
2. Катетер баллонный дилатационный периферический должны использовать только опытные врачи, которые хорошо разбираются в клинических аспектах ЧТА. Катетер баллонный дилатационный периферический ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать повторной



стерилизации и / или повторному использованию, поскольку это потенциально может привести к ухудшению характеристик изделия и повышению риска несоответствующей повторной стерилизации и перекрестного загрязнения. Катетер баллонный дилатационный периферический следует выбросить после одной процедуры. Соответственно, BrosMed Medical не несет ответственности за какие-либо прямые, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате повторного использования катетера баллонного дилатационного периферического.

3. НЕ используйте катетер баллонный дилатационный периферический, если его упаковка была открыта или повреждена.
4. Чтобы снизить вероятность повреждения сосуда, диаметр надутого баллона должен приблизительно соответствовать диаметру сосуда проксимальнее и дистальнее стеноза.
5. Когда катетер баллонный дилатационный периферический подвергается воздействию сосудистой системы, им следует манипулировать при условии высококачественного рентгеноскопического наблюдения. Запрещается продвигать и втягивать катетер баллонный дилатационный периферический, если баллон не спущен полностью в условиях вакуума. Если во время манипуляции возникает сопротивление, определите причину сопротивления, прежде чем продолжить.
6. Давление в баллоне не должно превышать максимально допустимое давление (МДД). См. этикетку изделия для получения информации об катетере баллонном дилатационном периферическом. Максимально допустимое давление основано на результатах испытаний *in vitro*. По крайней мере, 99,9% баллонов (с достоверностью 95%) не разорвутся на уровне МДД или ниже. Рекомендуется использовать изделие контроля давления для предотвращения избыточного давления.
7. Для надувания баллонов используйте только рекомендованную среду. Никогда не используйте воздух или газообразную среду для надувания баллона.
8. Не используйте и не пытайтесь выпрямить катетер баллонный дилатационный периферический, если shaft изогнут или перекручен, так как это может привести к поломке shaft. Вместо этого подготовьте новый катетер баллонный дилатационный периферический.
9. Используйте катетер баллонный дилатационный периферический до даты «Использовать до» (Срок годности), указанной на упаковке.

5. Меры предосторожности

1. Катетер баллонный дилатационный периферический должны использовать только врачи, обученные выполнению чрескожной транслюминальной ангиопластики.
2. Пациенту следует назначить соответствующую антикоагулянтную, антитромбоцитарную и вазодилататорную терапию.
3. Не используйте, если индивидуальная упаковка повреждена или открыта.
4. Использовать до истечения срока годности.
5. Внимательно осмотрите катетер баллонный дилатационный периферический перед использованием, чтобы убедиться, что изделие не было повреждено во время

транспортировки и что его размер и форма подходят для процедуры, для которой он будет использоваться.

6. При использовании любого катетера баллонного дилатационного периферического следует принимать меры для предотвращения или уменьшения свертывания крови.
7. Промойте или прополоскайте все изделия, попадающие в сосудистую систему, стерильным изотоническим физиологическим раствором или аналогичным раствором через прямое входное отверстие перед использованием. Рассмотрите возможность использования системной гепаринизации.
8. Когда катетер баллонный дилатационный периферический вводится в сосудистую систему, манипулировать им следует только при высококачественной рентгеноскопии.
9. Катетер баллонный дилатационный периферический всегда должен вводиться, перемещаться или извлекаться по проводнику.
10. Никогда не пытайтесь переместить направляющий проводник, когда баллон надут.
11. Не продвигайте катетер баллонный дилатационный периферический при значительном сопротивлении. Причину сопротивления следует определить с помощью рентгеноскопии и принять соответствующие меры.
12. Не пытайтесь провести катетер баллонный дилатационный периферический через направляющий катетер или стилет-катетер меньшего размера, чем указано на маркировке.
13. Размер надутого баллона следует выбирать так, чтобы он не превышал диаметр сосуда непосредственно дистальнее или проксимальнее стеноза.
14. Давление, превышающее максимально допустимое давление, может привести к разрыву баллона.
15. Не предназначен для контроля давления или введения контрастного вещества или других жидкостей.

6. Инструкция по применению

6.1 Подготовка к использованию

1. Выберите подходящий катетер баллонный дилатационный периферический для целевого сосуда.
2. Извлеките катетер баллонный дилатационный периферический из стерильной упаковки.
3. Перед использованием внимательно осмотрите катетер баллонный дилатационный периферический на предмет дефектов. Осмотрите катетер баллонный дилатационный периферический на предмет изгибов, перегибов и других повреждений. НЕ используйте неисправные катетеры баллонные дилатационные периферические.
4. При продувке баллона удалите воздух из изделия с помощью шприца объемом 20 см³, заполненного в объеме от 2 до 3 мл среды для накачивания, при этом катетер баллонный дилатационный периферический должен быть направлен вниз. Присоедините устройство для накачивания к боковому порту. Подайте отрицательное давление с помощью устройства для накачивания. НЕ пытайтесь выполнить предварительное надувание, чтобы очистить просвет баллона.



Предостережение: перед введением в тело необходимо удалить весь воздух из баллона и заменить его контрастным веществом. В противном случае могут возникнуть осложнения.

6.2 Инструкция по применению

6.2.1 Техника введения

- Поместите направляющий катетер или стилет-катетер с прикрепленным кровоостанавливающим клапаном в отверстие целевого сосуда.

- Продвиньте проволочный проводник через направляющий катетер или стилет-катетер, чтобы достичь и пересечь целевое поражение. Продвиньте дистальный конец катетера баллонного дилатационного периферического над проксимальным концом проволочного проводника. Убедитесь, что проводник выходит из катетера баллонного дилатационного периферического через место выхода проводника.

- Клапан гемостаза следует постепенно затягивать, чтобы контролировать обратный поток. Чрезмерное затягивание клапана может повлиять на время наполнения / спуска баллона, а также на движение направляющего проводника.

- Отследите катетер баллонный дилатационный периферический по проводнику, чтобы пересечь поражение, используя рентгеноконтрастные маркеры в целях определения местонахождения баллона через поражение.

6.2.2 Надувание баллона

- Надуйте баллон, чтобы расширить поражение, используя стандартные методы ЧТА (РТА).

- После каждого последующего надувания следует оценивать дистальный кровоток.

- Если значительный стеноз сохраняется, для его устранения могут потребоваться последовательные надувания. НЕ превышайте максимально допустимое давление (см. маркировку).

- Подтвердите результаты рентгеноскопией.

6.2.3 Удаление катетера баллонного дилатационного периферического

- Подайте отрицательное давление на устройство для накачивания и убедитесь, что баллон полностью спущен.

- Втяните катетер баллонный дилатационный периферический в направляющий катетер или стилет-катетер, сохраняя положение проволочного проводника.

- После того, как спущенный катетер баллонный дилатационный периферический извлечен, его следует протереть марлей, смоченной стерильным физиологическим раствором - Проверьте целостность катетера баллонного дилатационного периферического.

- При повторной установке того же катетера баллонного дилатационного периферического промойте прямое входное отверстие с помощью промывочной иглы (не входит в комплект поставки), как описано в разделе «Подготовка к использованию». Перед повторным введением катетер баллонный дилатационный периферический необходимо протереть марлей, смоченной стерильным физиологическим раствором. Баллон можно повторно свернуть с помощью инструмента для повторного сворачивания.

6.2.4 Инструмент для повторного сворачивания

— Это вспомогательный компонент, позволяющий при необходимости повторно сворачивать баллон.

- Сдувайте баллон, подавая отрицательное давление на устройство для накачивания, и поддерживайте вакуум.

- Визуально осмотрите баллон, чтобы убедиться, что он полностью спущен.

- Удалите инструмент для повторного сворачивания с карты соответствия.

- Загрузите не расширяющийся конец инструмента для повторного сворачивания на стилет.

- Осторожно введите стилет обратно через дистальный конец катетера баллонного дилатационного периферического и мимо проксимального конца баллона

- Удерживая катетер баллонный дилатационный периферический чуть проксимальнее баллона, осторожным вращательным движением надавите на инструмент для повторного сворачивания баллона, пока не будет покрыт весь баллон

- Осторожно извлеките сборку инструмента для повторного сворачивания.

- Осмотрите баллон на предмет возможных повреждений. Выбросьте катетер баллонный дилатационный периферический, если на баллоне есть какие-либо визуальные повреждения.

7. Техническая спецификация

Комплект поставки изделия:

1. Катетер баллонный дилатационный периферический – 1 шт/уп;
2. Инструмент для повторного сворачивания – 1 шт/уп;
3. Инструкция по применению -1 шт/уп;
4. Карточка соответствия – 1 шт/уп.

Материалы изготовления изделия представлены в таблицах 7.1-7.7

Таблица 7.1 – Материалы, из которого изготовлен катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring	Материал (Марка)
Баллон	Нейлон (GRILAMID L 25 NATUR)
Внешняя часть shaft	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Внутренняя часть shaft	Нейлон (RILSAN® BESVO A MED)
	Полиэтилен высокого давления LDPE (OREVAC® 18300)
	Полиэтилен низкого давления HDPE (Petrothene LR734002X01)
Кончик катетера и кожух	Pebax (Pebax 33 Series)
Покрытие	Гидрофильное (3-B-708 (Type A-809)/ 2-T-812 (Type A-551))

	Силиконовое (DOW CORNING(R) MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION/ DOW CORNING(R) 360 MEDICAL FLUID, 100 CST/ Heptane, SCRC CSDS142-82-5)
Рентгеноконтрастные маркерные полосы	Платина (Cas. No 7440-06-4) / Иридий (Cas. No 7439-88-5)
Разрезающие кромки	Нержавеющая сталь (STAINLESS TYPE 302/304)
Металлическое кольцо	Нержавеющая сталь (STAINLESS TYPE 302/304)
Разгрузочная муфта	Термопластичный полиуретан TPU (TEXIN RXT65D 000000)
Y-образная канюля	Поликарбонат (HPS2 -1H1125 -GE27)

Таблица 7.2 – Материалы, из которого изготовлен катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Polux SC PTA

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Polux SC PTA	Материал (Марка)
Баллон (Ø1.5)	Pebax (Pebax 33 Series)
Баллон (Ø2.0-10.0)	Нейлон (GRILAMID L 25 NATUR)
Внешняя часть шфта	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Внутренняя часть шфта	Нейлон (RILSAN® BESVO A MED)
	Полиэтилен высокого давления LDPE (OREVAC® 18300)
	Полиэтилен низкого давления HDPE (Petrothene LR734002X01)
Рентгеноконтрастные маркерные полосы	Платина (Cas. No 7440-06-4) / Иридий (Cas. No 7439-88-5)
Покрытие	Гидрофильное (3-B-708 (Type A-809)/ 2-T-812 (Type A-551))
	Силиконовое (DOW CORNING(R) MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION/ DOW CORNING(R) 360 MEDICAL FLUID, 100 CST/ Heptane, SCRC CSDS142-82-5)
Разгрузочная муфта	Термопластичный полиуретан TPU (TEXIN RXT65D 000000)
Y-образная канюля	Поликарбонат (HPS2 -1H1125 -GE27)

Таблица 7.3 – Материалы, из которого изготовлен катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Minerva SC PTA

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического	Материал (Марка)
--	------------------

в варианте исполнения Minerva SC РТА	
Баллон (Ø1.5)	Pebax (Pebax 33 Series)
Баллон (Ø2.0-10.0)	Нейлон (GRILAMID L 25 NATUR)
Внешняя часть шфта	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Внутренняя часть шфта	Нейлон (RILSAN® BESVO A MED)
	Полиэтилен высокого давления LDPE (OREVAC® 18300)
	Полиэтилен низкого давления HDPE (Petrothene LR734002X01)
Рентгеноконтрастные маркерные полосы	Платина (Cas. No 7440-06-4) / Иридий (Cas. No 7439-88-5)
Покрытие	Гидрофильное (3-B-708 (Type A-809)/ 2-T-812 (Type A-551))
	Силиконовое (DOW CORNING(R) MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION/ DOW CORNING(R) 360 MEDICAL FLUID, 100 CST/ Heptane, SCRC CSDS142-82-5)
Разгрузочная муфта	Термопластичный полиуретан TPU (TEXIN RXT65D 000000)
У-образная канюля	Поликарбонат (HPS2 -1H1125 -GE27)

Таблица 7.4 – Материалы, из которого изготовлен катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Atropos SC РТА

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Atropos SC РТА	Материал (Марка)
Баллон (Ø1.5)	Pebax (Pebax 33 Series)
Баллон (Ø2.0-10.0)	Нейлон (GRILAMID L 25 NATUR)
Внешняя часть шфта	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Внутренняя часть шфта	Нейлон (RILSAN® BESVO A MED)
	Полиэтилен высокого давления LDPE (OREVAC® 18300)
	Полиэтилен низкого давления HDPE (Petrothene LR734002X01)
Рентгеноконтрастные маркерные полосы	Платина (Cas. No 7440-06-4) / Иридий (Cas. No 7439-88-5)

Покрытие	Гидрофильное (3-B-708 (Type A-809)/ 2-T-812 (Type A-551))
	Силиконовое (DOW CORNING(R) MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION/ DOW CORNING(R) 360 MEDICAL FLUID, 100 CST/ Heptane, SCRC CSDS142-82-5)
Разгрузочная муфта	Термопластичный полиуретан TPU (TEXIN RXT65D 000000)
У-образная канюля	Поликарбонат (HPS2 -1H1125 -GE27)

Таблица 7.5 – Материалы, из которого изготовлен катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Castor NC PTA

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Castor NC PTA	Материал (Марка)
Баллон (Ø2.0-5.0)	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Баллон (Ø5.5-8.0)	Нейлон (GRILAMID L 25 NATUR)
Внешняя часть shaft	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Внутренняя часть shaft	Нейлон (RILSAN® BESVO A MED)
	Полиэтилен высокого давления LDPE (OREVAC® 18300)
	Полиэтилен низкого давления HDPE (Petrothene LR734002X01)
Рентгеноконтрастные маркерные полосы	Платина (Cas. No 7440-06-4) / Иридий (Cas. No 7439-88-5)
Покрытие	Гидрофильное (3-B-708 (Type A-809)/ 2-T-812 (Type A-551))
	Силиконовое (DOW CORNING(R) MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION/ DOW CORNING(R) 360 MEDICAL FLUID, 100 CST/ Heptane, SCRC CSDS142-82-5)
Разгрузочная муфта	Термопластичный полиуретан TPU (TEXIN RXT65D 000000)
У-образная канюля	Поликарбонат (HPS2 -1H1125 -GE27)

Таблица 7.6 – Материалы, из которого изготовлен катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Achilles NC PTA

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Achilles NC PTA	Материал (Марка)
Баллон (Ø2.0-5.0)	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Баллон (Ø5.5-8.0)	Нейлон (GRILAMID L 25 NATUR)
Внешняя часть shaft	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Внутренняя часть shaft	Нейлон (RILSAN® BESVO A MED)
	Полиэтилен высокого давления LDPE (OREVAC® 18300)
	Полиэтилен низкого давления HDPE (Petrothene LR734002X01)
Рентгеноконтрастные маркерные полосы	Платина (Cas. No 7440-06-4) / Иридий (Cas. No 7439-88-5)
Покрытие	Гидрофильное (3-B-708 (Type A-809)/ 2-T-812 (Type A-551))
	Силиконовое (DOW CORNING(R) MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION/ DOW CORNING(R) 360 MEDICAL FLUID, 100 CST/ Heptane, SCRC CSDS142-82-5)
Разгрузочная муфта	Термопластичный полиуретан TPU (TEXIN RXT65D 000000)
Y-образная канюля	Поликарбонат (HPS2 -1H1125 -GE27)

Таблица 7.7 – Материалы, из которого изготовлен катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Hermes NC PTA

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Hermes NC PTA	Материал (Марка)
Баллон (Ø2.0-5.0)	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Баллон (Ø5.5-8.0)	Нейлон (GRILAMID L 25 NATUR)
Внешняя часть shaft	Нейлон (Vestamid® care ML21)
Внутренняя часть shaft	Нейлон (RILSAN® BESVO A MED)
	Полиэтилен высокого давления LDPE (OREVAC® 18300)
	Полиэтилен низкого давления HDPE (Petrothene LR734002X01)

Компонент катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Hermes NC PTA	Материал (Марка)
Рентгеноконтрастные маркерные полосы	Платина (Cas. No 7440-06-4) / Иридий (Cas. No 7439-88-5)
Покрытие	Гидрофильное (3-B-708 (Type A-809)/ 2-T-812 (Type A-551))
	Силиконовое (DOW CORNING(R) MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION/ DOW CORNING(R) 360 MEDICAL FLUID, 100 CST/ Heptane, SCRC CSDS142-82-5)
Разгрузочная муфта	Термопластичный полиуретан TPU (TEXIN RXT65D 000000)
У-образная канюля	Поликарбонат (HPS2 -1H1125 -GE27)

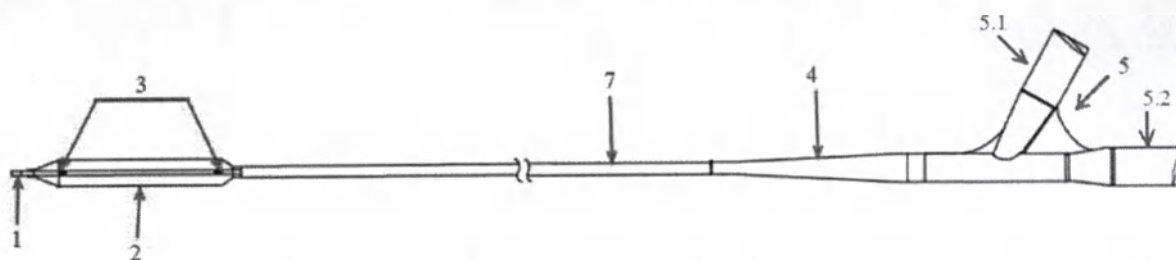


Рисунок 7.1a Катетер баллонный дилатационный периферический в вариантах исполнения Polux SC PTA, Minerva SC PTA, Atropos SC PTA, Castor NC PTA, Achilles NC PTA и Hermes NC PTA. Конструкция изделия

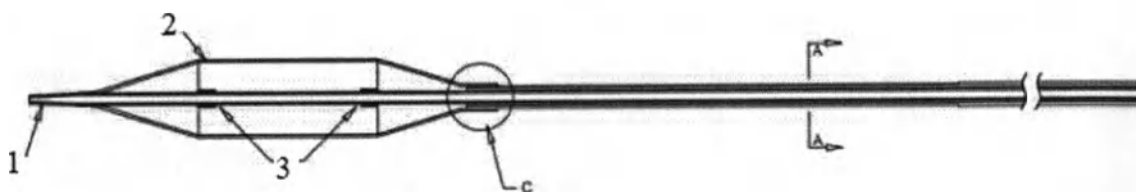


Рисунок 7.1b Катетер баллонный дилатационный периферический в вариантах исполнения Polux SC PTA, Minerva SC PTA, Atropos SC PTA, Castor NC PTA, Achilles NC PTA и Hermes NC PTA. Конструкция изделия

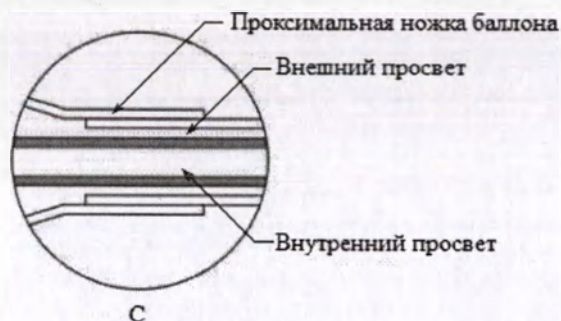


Рисунок 7.1с Катетер баллонный дилатационный периферический в вариантах исполнения Polux SC PTA, Minerva SC PTA, Atropos SC PTA, Castor NC PTA, Achilles NC PTA и Hermes NC PTA. Конструкция изделия

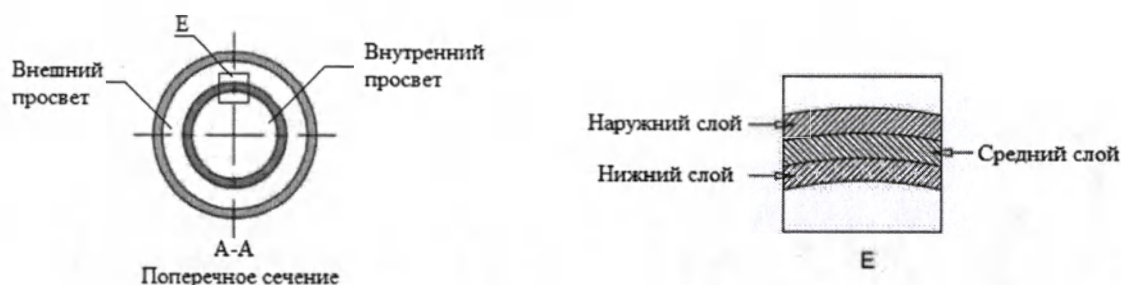


Рисунок 7.1д Катетер баллонный дилатационный периферический в вариантах исполнения Polux SC PTA, Minerva SC PTA, Atropos SC PTA, Castor NC PTA, Achilles NC PTA и Hermes NC PTA. Конструкция изделия

Конструкция катетера баллонного дилатационного периферического в вариантах исполнения Polux SC PTA, Minerva SC PTA, Atropos SC PTA, Castor NC PTA, Achilles NC PTA и Hermes NC PTA:

1. Кончик катетера
2. Баллон
3. Рентгеноконтрастные маркерные полосы
4. Разгрузочная муфта
5. Y-образная канюля
- 5.1 Боковой порт
- 5.2 Прямое входное отверстие
7. Шафт

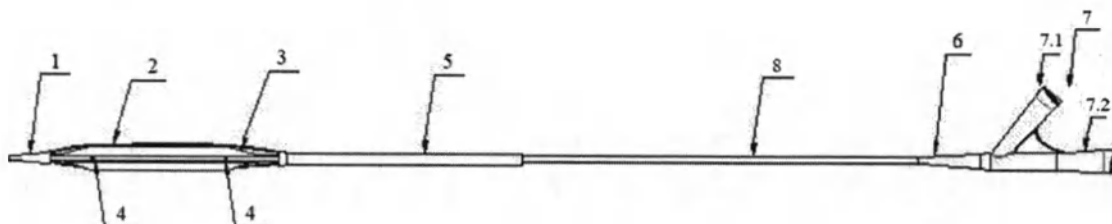


Рисунок 7.2а Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring. Конструкция изделия



Рисунок 7.2b Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring. Конструкция изделия



Рисунок 7.2c Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring. Конструкция изделия

Конструкция катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring:

1. Кончик катетера
2. Разрезающие кромки
3. Баллон
4. Рентгеноконтрастные маркерные полосы
5. Кожух
6. Разгрузочная муфта
7. Y-образная канюля
- 7.1 Боковой порт
- 7.2 Прямое входное отверстие
8. Штифт

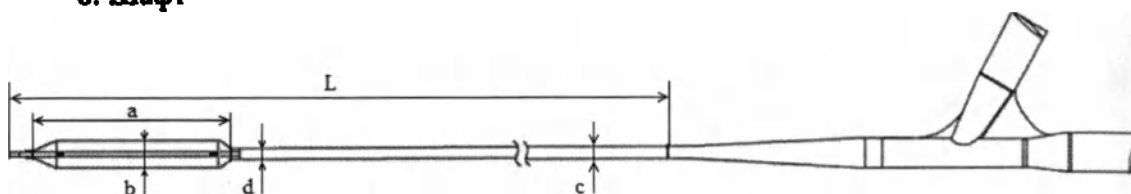


Рисунок 7.3 Катетер баллонный дилатационный периферический в вариантах исполнения Polux SC PTA, Minerva SC PTA, Atropos SC PTA, Castor NC PTA, Achilles NC PTA и Hermes NC PTA. Обозначение размеров

Таблица 7.8.1 – Технические характеристики катетера баллонного дилатационного периферического в вариантах исполнения Polux SC
РТА


Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c
818-015005-070	70±3см	5±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020005-070	70±3см	5±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015010-070	70±3см	10±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020010-070	70±3см	10±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015015-070	70±3см	15±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020015-070	70±3см	15±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015020-070	70±3см	20±2	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020020-070	70±3см	20±2	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015030-070	70±3см	30±2	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020030-070	70±3см	30±2	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015040-070	70±3см	40±3	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020040-070	70±3см	40±3	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015060-070	70±3см	60±4	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020060-070	70±3см	60±4	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015080-070	70±3см	80±5	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020080-070	70±3см	80±5	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015100-070	70±3см	100±6	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020100-070	70±3см	100±6	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015120-070	70±3см	120±8	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020120-070	70±3см	120±8	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015150-070	70±3см	150±8	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020150-070	70±3см	150±8	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015200-070	70±3см	200±8	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020200-070	70±3см	200±8	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025005-070	70±3см	5±1	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030005-070	70±3см	5±1	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025010-070	70±3см	10±1	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030010-070	70±3см	10±1	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025015-070	70±3см	15±1	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030015-070	70±3см	15±1	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025020-070	70±3см	20±2	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030020-070	70±3см	20±2	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025030-070	70±3см	30±2	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030030-070	70±3см	30±2	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025040-070	70±3см	40±3	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030040-070	70±3см	40±3	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025060-070	70±3см	60±4	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030060-070	70±3см	60±4	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025080-070	70±3см	80±5	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030080-070	70±3см	80±5	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025100-070	70±3см	100±6	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030100-070	70±3см	100±6	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025120-070	70±3см	120±8	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030120-070	70±3см	120±8	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025150-070	70±3см	150±8	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030150-070	70±3см	150±8	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c
818-025200-070	70±3см	200±8	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030200-070	70±3см	200±8	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035005-070	70±3см	5±1	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040005-070	70±3см	5±1	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035010-070	70±3см	10±1	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040010-070	70±3см	10±1	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035015-070	70±3см	15±1	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040015-070	70±3см	15±1	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035020-070	70±3см	20±2	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040020-070	70±3см	20±2	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035030-070	70±3см	30±2	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040030-070	70±3см	30±2	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035040-070	70±3см	40±3	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040040-070	70±3см	40±3	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035060-070	70±3см	60±4	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040060-070	70±3см	60±4	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035080-070	70±3см	80±5	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040080-070	70±3см	80±5	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035100-070	70±3см	100±6	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040100-070	70±3см	100±6	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035120-070	70±3см	120±8	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040120-070	70±3см	120±8	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035150-070	70±3см	150±8	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040150-070	70±3см	150±8	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035200-070	70±3см	200±8	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040200-070	70±3см	200±8	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045005-070	70±3см	5±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050005-070	70±3см	5±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045010-070	70±3см	10±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050010-070	70±3см	10±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045015-070	70±3см	15±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050015-070	70±3см	15±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045020-070	70±3см	20±2	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050020-070	70±3см	20±2	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045030-070	70±3см	30±2	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050030-070	70±3см	30±2	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045040-070	70±3см	40±3	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050040-070	70±3см	40±3	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045060-070	70±3см	60±4	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050060-070	70±3см	60±4	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045080-070	70±3см	80±5	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050080-070	70±3см	80±5	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045100-070	70±3см	100±6	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050100-070	70±3см	100±6	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045120-070	70±3см	120±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050120-070	70±3см	120±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045150-070	70±3см	150±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050150-070	70±3см	150±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045200-070	70±3см	200±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050200-070	70±3см	200±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-055005-070	70±3см	5±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060005-070	70±3см	5±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c
818-055010-070	70±3см	10±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060010-070	70±3см	10±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055015-070	70±3см	15±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060015-070	70±3см	15±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055020-070	70±3см	20±2	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060020-070	70±3см	20±2	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055030-070	70±3см	30±2	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060030-070	70±3см	30±2	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055040-070	70±3см	40±3	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060040-070	70±3см	40±3	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055060-070	70±3см	60±4	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060060-070	70±3см	60±4	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055080-070	70±3см	80±5	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060080-070	70±3см	80±5	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055100-070	70±3см	100±6	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060100-070	70±3см	100±6	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055120-070	70±3см	120±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060120-070	70±3см	120±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055150-070	70±3см	150±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060150-070	70±3см	150±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055200-070	70±3см	200±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060200-070	70±3см	200±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-015005-090	90±3см	5±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020005-090	90±3см	5±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015010-090	90±3см	10±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020010-090	90±3см	10±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015015-090	90±3см	15±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020015-090	90±3см	15±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015020-090	90±3см	20±2	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020020-090	90±3см	20±2	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015030-090	90±3см	30±2	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020030-090	90±3см	30±2	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015040-090	90±3см	40±3	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020040-090	90±3см	40±3	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015060-090	90±3см	60±4	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020060-090	90±3см	60±4	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015080-090	90±3см	80±5	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020080-090	90±3см	80±5	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015100-090	90±3см	100±6	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020100-090	90±3см	100±6	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015120-090	90±3см	120±8	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020120-090	90±3см	120±8	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015150-090	90±3см	150±8	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020150-090	90±3см	150±8	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015200-090	90±3см	200±8	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020200-090	90±3см	200±8	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025005-090	90±3см	5±1	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030005-090	90±3см	5±1	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025010-090	90±3см	10±1	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030010-090	90±3см	10±1	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025015-090	90±3см	15±1	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030015-090	90±3см	15±1	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c
818-025020-090	90±3см	20±2	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030020-090	90±3см	20±2	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025030-090	90±3см	30±2	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030030-090	90±3см	30±2	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025040-090	90±3см	40±3	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030040-090	90±3см	40±3	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025060-090	90±3см	60±4	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030060-090	90±3см	60±4	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025080-090	90±3см	80±5	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030080-090	90±3см	80±5	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025100-090	90±3см	100±6	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030100-090	90±3см	100±6	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025120-090	90±3см	120±8	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030120-090	90±3см	120±8	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025150-090	90±3см	150±8	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030150-090	90±3см	150±8	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-025200-090	90±3см	200±8	2.5± 0.25	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-030200-090	90±3см	200±8	3.0± 0.3	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035005-090	90±3см	5±1	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040005-090	90±3см	5±1	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035010-090	90±3см	10±1	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040010-090	90±3см	10±1	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035015-090	90±3см	15±1	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040015-090	90±3см	15±1	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035020-090	90±3см	20±2	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040020-090	90±3см	20±2	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035030-090	90±3см	30±2	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040030-090	90±3см	30±2	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035040-090	90±3см	40±3	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040040-090	90±3см	40±3	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035060-090	90±3см	60±4	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040060-090	90±3см	60±4	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035080-090	90±3см	80±5	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040080-090	90±3см	80±5	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035100-090	90±3см	100±6	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040100-090	90±3см	100±6	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035120-090	90±3см	120±8	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040120-090	90±3см	120±8	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035150-090	90±3см	150±8	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040150-090	90±3см	150±8	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-035200-090	90±3см	200±8	3.5± 0.35	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-040200-090	90±3см	200±8	4.0± 0.4	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045005-090	90±3см	5±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050005-090	90±3см	5±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045010-090	90±3см	10±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050010-090	90±3см	10±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045015-090	90±3см	15±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050015-090	90±3см	15±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045020-090	90±3см	20±2	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050020-090	90±3см	20±2	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045030-090	90±3см	30±2	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050030-090	90±3см	30±2	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c
818-045040-090	90±3см	40±3	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050040-090	90±3см	40±3	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045060-090	90±3см	60±4	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050060-090	90±3см	60±4	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045080-090	90±3см	80±5	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050080-090	90±3см	80±5	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045100-090	90±3см	100±6	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050100-090	90±3см	100±6	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045120-090	90±3см	120±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050120-090	90±3см	120±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045150-090	90±3см	150±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050150-090	90±3см	150±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045200-090	90±3см	200±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050200-090	90±3см	200±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-055005-090	90±3см	5±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060005-090	90±3см	5±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055010-090	90±3см	10±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060010-090	90±3см	10±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055015-090	90±3см	15±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060015-090	90±3см	15±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055020-090	90±3см	20±2	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060020-090	90±3см	20±2	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055030-090	90±3см	30±2	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060030-090	90±3см	30±2	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055040-090	90±3см	40±3	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060040-090	90±3см	40±3	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055060-090	90±3см	60±4	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060060-090	90±3см	60±4	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055080-090	90±3см	80±5	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060080-090	90±3см	80±5	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055100-090	90±3см	100±6	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060100-090	90±3см	100±6	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055120-090	90±3см	120±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060120-090	90±3см	120±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055150-090	90±3см	150±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060150-090	90±3см	150±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055200-090	90±3см	200±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060200-090	90±3см	200±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-015005-150	150±3см	5±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020005-150	150±3см	5±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015010-150	150±3см	10±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020010-150	150±3см	10±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015015-150	150±3см	15±1	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020015-150	150±3см	15±1	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015020-150	150±3см	20±2	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020020-150	150±3см	20±2	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015030-150	150±3см	30±2	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020030-150	150±3см	30±2	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015040-150	150±3см	40±3	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020040-150	150±3см	40±3	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-015060-150	150±3см	60±4	1.5± 0.15	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-020060-150	150±3см	60±4	2.0± 0.2	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05

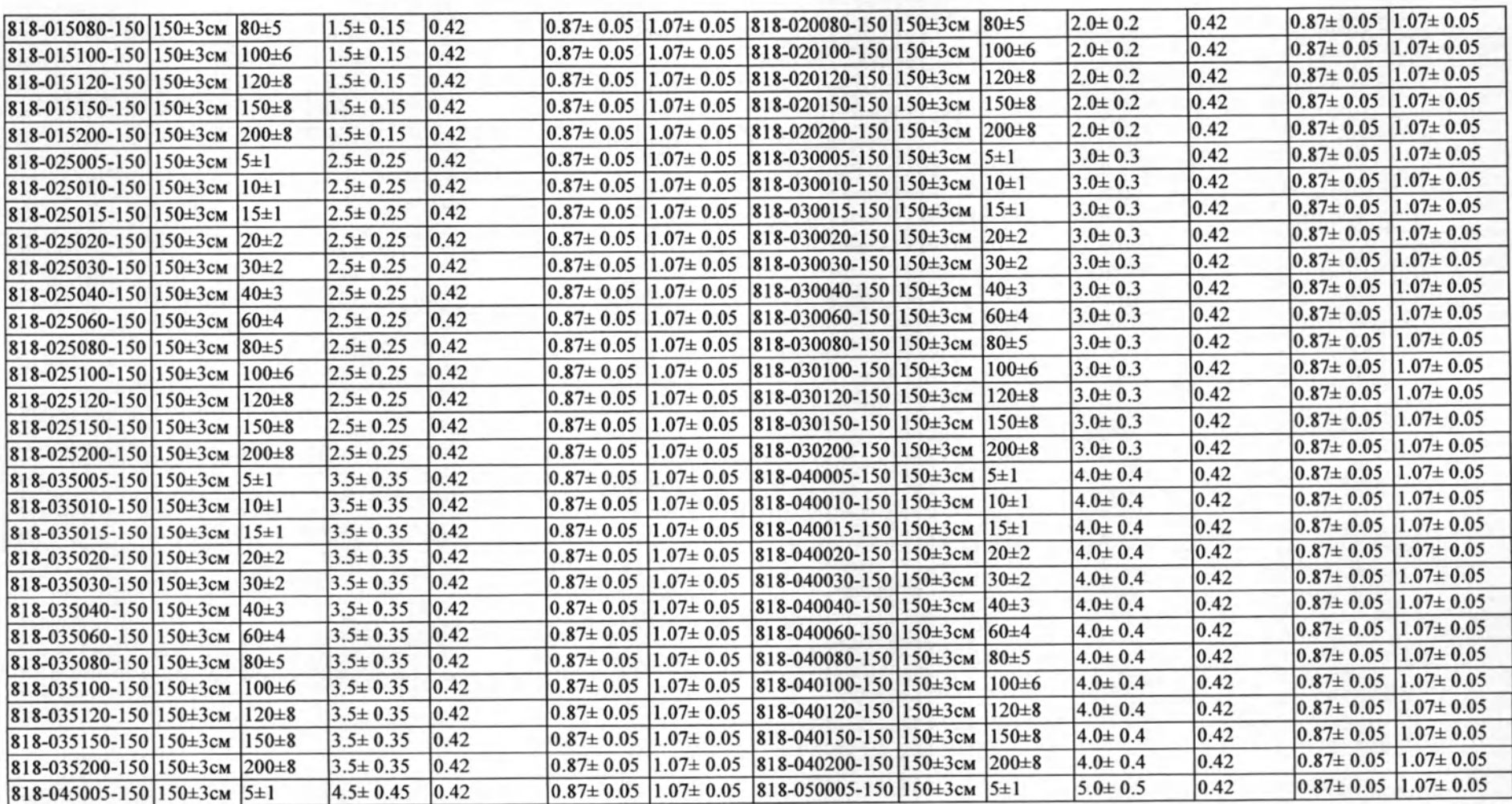

818-045010-150	150±3cm	10±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050010-150	150±3cm	10±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045015-150	150±3cm	15±1	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050015-150	150±3cm	15±1	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045020-150	150±3cm	20±2	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050020-150	150±3cm	20±2	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045030-150	150±3cm	30±2	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050030-150	150±3cm	30±2	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045040-150	150±3cm	40±3	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050040-150	150±3cm	40±3	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045060-150	150±3cm	60±4	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050060-150	150±3cm	60±4	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045080-150	150±3cm	80±5	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050080-150	150±3cm	80±5	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045100-150	150±3cm	100±6	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050100-150	150±3cm	100±6	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045120-150	150±3cm	120±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050120-150	150±3cm	120±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045150-150	150±3cm	150±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050150-150	150±3cm	150±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-045200-150	150±3cm	200±8	4.5± 0.45	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05	818-050200-150	150±3cm	200±8	5.0± 0.5	0.42	0.87± 0.05	1.07± 0.05
818-055005-150	150±3cm	5±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060005-150	150±3cm	5±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055010-150	150±3cm	10±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060010-150	150±3cm	10±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055015-150	150±3cm	15±1	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060015-150	150±3cm	15±1	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055020-150	150±3cm	20±2	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060020-150	150±3cm	20±2	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055030-150	150±3cm	30±2	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060030-150	150±3cm	30±2	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055040-150	150±3cm	40±3	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060040-150	150±3cm	40±3	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055060-150	150±3cm	60±4	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060060-150	150±3cm	60±4	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055080-150	150±3cm	80±5	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060080-150	150±3cm	80±5	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055100-150	150±3cm	100±6	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060100-150	150±3cm	100±6	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055120-150	150±3cm	120±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060120-150	150±3cm	120±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055150-150	150±3cm	150±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060150-150	150±3cm	150±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05
818-055200-150	150±3cm	200±8	5.5± 0.55	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05	818-060200-150	150±3cm	200±8	6.0± 0.6	0.42	1.07± 0.05	1.13± 0.05

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,014 дюйма (0.36 мм)

Таблица 7.8.2 – Технические характеристики катетера баллонного дилатационного периферического в вариантах исполнения Minerva SC

РТА

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c
803-030020-040	40± 3 см	20± 2	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030030-040	40± 3 см	30± 2	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035020-040	40± 3 см	20± 2	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-035030-040	40± 3 см	30± 2	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-040020-040	40± 3 см	20± 2	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040030-040	40± 3 см	30± 2	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045020-040	40± 3 см	20± 2	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-045030-040	40± 3 см	30± 2	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-050020-040	40± 3 см	20± 2	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050030-040	40± 3 см	30± 2	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055020-040	40± 3 см	20± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-055030-040	40± 3 см	30± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-060020-040	40± 3 см	20± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060030-040	40± 3 см	30± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-070020-040	40± 3 см	20± 2	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-070030-040	40± 3 см	30± 2	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-080020-040	40± 3 см	20± 2	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080030-040	40± 3 см	30± 2	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-030040-040	40± 3 см	40± 3	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030060-040	40± 3 см	60± 4	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035040-040	40± 3 см	40± 3	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-035060-040	40± 3 см	60± 4	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-040040-040	40± 3 см	40± 3	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040060-040	40± 3 см	60± 4	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045040-040	40± 3 см	40± 3	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-045060-040	40± 3 см	60± 4	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-050040-040	40± 3 см	40± 3	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050060-040	40± 3 см	60± 4	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055040-040	40± 3 см	40± 3	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-055060-040	40± 3 см	60± 4	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-060040-040	40± 3 см	40± 3	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060060-040	40± 3 см	60± 4	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-070040-040	40± 3 см	40± 3	7.0± 0.7	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-070060-040	40± 3 см	60± 4	7.0± 0.7	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-080040-040	40± 3 см	40± 3	8.0± 0.8	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-080060-040	40± 3 см	60± 4	8.0± 0.8	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015005-070	70 ± 3 см	5± 1	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020005-070	70 ± 3 см	5± 1	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015010-070	70 ± 3 см	10± 1	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020010-070	70 ± 3 см	10± 1	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015015-070	70 ± 3 см	15± 1	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020015-070	70 ± 3 см	15± 1	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05

[illegible]



803-035120-070	70 ± 3 cm	120± 8	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040120-070	70 ± 3 cm	120± 8	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035150-070	70 ± 3 cm	150± 8	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040150-070	70 ± 3 cm	150± 8	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035200-070	70 ± 3 cm	200± 8	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040200-070	70 ± 3 cm	200± 8	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045005-070	70 ± 3 cm	5± 1	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050005-070	70 ± 3 cm	5± 1	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045010-070	70 ± 3 cm	10± 1	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050010-070	70 ± 3 cm	10± 1	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045015-070	70 ± 3 cm	15± 1	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050015-070	70 ± 3 cm	15± 1	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045020-070	70 ± 3 cm	20± 2	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050020-070	70 ± 3 cm	20± 2	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045030-070	70 ± 3 cm	30± 2	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050030-070	70 ± 3 cm	30± 2	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045040-070	70 ± 3 cm	40± 3	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050040-070	70 ± 3 cm	40± 3	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045060-070	70 ± 3 cm	60± 4	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050060-070	70 ± 3 cm	60± 4	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045080-070	70 ± 3 cm	80± 5	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050080-070	70 ± 3 cm	80± 5	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045100-070	70 ± 3 cm	100± 6	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050100-070	70 ± 3 cm	100± 6	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045120-070	70 ± 3 cm	120± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050120-070	70 ± 3 cm	120± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045150-070	70 ± 3 cm	150± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050150-070	70 ± 3 cm	150± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045200-070	70 ± 3 cm	200± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050200-070	70 ± 3 cm	200± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055005-070	70 ± 3 cm	5± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060005-070	70 ± 3 cm	5± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055010-070	70 ± 3 cm	10± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060010-070	70 ± 3 cm	10± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055015-070	70 ± 3 cm	15± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060015-070	70 ± 3 cm	15± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055020-070	70 ± 3 cm	20± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060020-070	70 ± 3 cm	20± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055030-070	70 ± 3 cm	30± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060030-070	70 ± 3 cm	30± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055040-070	70 ± 3 cm	40± 3	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060040-070	70 ± 3 cm	40± 3	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055060-070	70 ± 3 cm	60± 4	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060060-070	70 ± 3 cm	60± 4	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055080-070	70 ± 3 cm	80± 5	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060080-070	70 ± 3 cm	80± 5	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055100-070	70 ± 3 cm	100± 6	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060100-070	70 ± 3 cm	100± 6	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055120-070	70 ± 3 cm	120± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060120-070	70 ± 3 cm	120± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055150-070	70 ± 3 cm	150± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060150-070	70 ± 3 cm	150± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055200-070	70 ± 3 cm	200± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060200-070	70 ± 3 cm	200± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070005-070	70 ± 3 cm	5± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080005-070	70 ± 3 cm	5± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070010-070	70 ± 3 cm	10± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080010-070	70 ± 3 cm	10± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070015-070	70 ± 3 cm	15± 1	7.0± 0.7	0.53	1.13± 0.05	1.47± 0.05	803-080015-070	70 ± 3 cm	15± 1	8.0± 0.8	0.53	1.13± 0.05	1.47± 0.05

803-070020-070	70 ± 3 cm	20 ± 2	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080020-070	70 ± 3 cm	20 ± 2	8.0 ± 0.8	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-070030-070	70 ± 3 cm	30 ± 2	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080030-070	70 ± 3 cm	30 ± 2	8.0 ± 0.8	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-070040-070	70 ± 3 cm	40 ± 3	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080040-070	70 ± 3 cm	40 ± 3	8.0 ± 0.8	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-070060-070	70 ± 3 cm	60 ± 4	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080060-070	70 ± 3 cm	60 ± 4	8.0 ± 0.8	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-070080-070	70 ± 3 cm	80 ± 5	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080080-070	70 ± 3 cm	80 ± 5	8.0 ± 0.8	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-070100-070	70 ± 3 cm	100 ± 6	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080100-070	70 ± 3 cm	100 ± 6	8.0 ± 0.8	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-070120-070	70 ± 3 cm	120 ± 8	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080120-070	70 ± 3 cm	120 ± 8	8.0 ± 0.8	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-070150-070	70 ± 3 cm	150 ± 8	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080150-070	70 ± 3 cm	150 ± 8	8.0 ± 0.8	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-070200-070	70 ± 3 cm	200 ± 8	7.0 ± 0.7	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-080200-070	70 ± 3 cm	200 ± 8	8.0 ± 0.8	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-090005-070	70 ± 3 cm	5 ± 1	9.0 ± 0.9	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-100005-070	70 ± 3 cm	5 ± 1	10.0 ± 1	0.53	1.33 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-090010-070	70 ± 3 cm	10 ± 1	9.0 ± 0.9	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-100010-070	70 ± 3 cm	10 ± 1	10.0 ± 1	0.53	1.33 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-090015-070	70 ± 3 cm	15 ± 1	9.0 ± 0.9	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-100015-070	70 ± 3 cm	15 ± 1	10.0 ± 1	0.53	1.33 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-090020-070	70 ± 3 cm	20 ± 2	9.0 ± 0.9	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-100020-070	70 ± 3 cm	20 ± 2	10.0 ± 1	0.53	1.33 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-090030-070	70 ± 3 cm	30 ± 2	9.0 ± 0.9	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-100030-070	70 ± 3 cm	30 ± 2	10.0 ± 1	0.53	1.33 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-090040-070	70 ± 3 cm	40 ± 3	9.0 ± 0.9	0.53	1.13 ± 0.05	1.47 ± 0.05	803-100040-070	70 ± 3 cm	40 ± 3	10.0 ± 1	0.53	1.33 ± 0.05	1.47 ± 0.05
803-090060-070	70 ± 3 cm	60 ± 4	9.0 ± 0.9	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05	803-100060-070	70 ± 3 cm	60 ± 4	10.0 ± 1	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-090080-070	70 ± 3 cm	80 ± 5	9.0 ± 0.9	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05	803-100080-070	70 ± 3 cm	80 ± 5	10.0 ± 1	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-090100-070	70 ± 3 cm	100 ± 6	9.0 ± 0.9	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05	803-100100-070	70 ± 3 cm	100 ± 6	10.0 ± 1	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-090120-070	70 ± 3 cm	120 ± 8	9.0 ± 0.9	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05	803-100120-070	70 ± 3 cm	120 ± 8	10.0 ± 1	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-090150-070	70 ± 3 cm	150 ± 8	9.0 ± 0.9	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05	803-100150-070	70 ± 3 cm	150 ± 8	10.0 ± 1	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-090200-070	70 ± 3 cm	200 ± 8	9.0 ± 0.9	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05	803-100200-070	70 ± 3 cm	200 ± 8	10.0 ± 1	0.53	1.48 ± 0.05	1.73 ± 0.05
803-015005-090	90 ± 3 cm	5 ± 1	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020005-090	90 ± 3 cm	5 ± 1	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015010-090	90 ± 3 cm	10 ± 1	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020010-090	90 ± 3 cm	10 ± 1	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015015-090	90 ± 3 cm	15 ± 1	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020015-090	90 ± 3 cm	15 ± 1	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015020-090	90 ± 3 cm	20 ± 2	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020020-090	90 ± 3 cm	20 ± 2	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015030-090	90 ± 3 cm	30 ± 2	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020030-090	90 ± 3 cm	30 ± 2	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015040-090	90 ± 3 cm	40 ± 3	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020040-090	90 ± 3 cm	40 ± 3	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015060-090	90 ± 3 cm	60 ± 4	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020060-090	90 ± 3 cm	60 ± 4	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015080-090	90 ± 3 cm	80 ± 5	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020080-090	90 ± 3 cm	80 ± 5	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05
803-015100-090	90 ± 3 cm	100 ± 6	1.5 ± 0.15	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05	803-020100-090	90 ± 3 cm	100 ± 6	2.0 ± 0.2	0.53	1.06 ± 0.05	1.13 ± 0.05




803-015120-090	90± 3 cm	120± 8	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020120-090	90± 3 cm	120± 8	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015150-090	90± 3 cm	150± 8	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020150-090	90± 3 cm	150± 8	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015200-090	90± 3 cm	200± 8	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020200-090	90± 3 cm	200± 8	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025005-090	90± 3 cm	5± 1	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030005-090	90± 3 cm	5± 1	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025010-090	90± 3 cm	10± 1	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030010-090	90± 3 cm	10± 1	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025015-090	90± 3 cm	15± 1	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030015-090	90± 3 cm	15± 1	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025020-090	90± 3 cm	20± 2	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030020-090	90± 3 cm	20± 2	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025030-090	90± 3 cm	30± 2	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030030-090	90± 3 cm	30± 2	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025040-090	90± 3 cm	40± 3	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030040-090	90± 3 cm	40± 3	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025060-090	90± 3 cm	60± 4	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030060-090	90± 3 cm	60± 4	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025080-090	90± 3 cm	80± 5	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030080-090	90± 3 cm	80± 5	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025100-090	90± 3 cm	100± 6	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030100-090	90± 3 cm	100± 6	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025120-090	90± 3 cm	120± 8	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030120-090	90± 3 cm	120± 8	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025150-090	90± 3 cm	150± 8	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030150-090	90± 3 cm	150± 8	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025200-090	90± 3 cm	200± 8	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030200-090	90± 3 cm	200± 8	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035005-090	90± 3 cm	5± 1	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040005-090	90± 3 cm	5± 1	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035010-090	90± 3 cm	10± 1	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040010-090	90± 3 cm	10± 1	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035015-090	90± 3 cm	15± 1	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040015-090	90± 3 cm	15± 1	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035020-090	90± 3 cm	20± 2	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040020-090	90± 3 cm	20± 2	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035030-090	90± 3 cm	30± 2	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040030-090	90± 3 cm	30± 2	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035040-090	90± 3 cm	40± 3	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040040-090	90± 3 cm	40± 3	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035060-090	90± 3 cm	60± 4	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040060-090	90± 3 cm	60± 4	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035080-090	90± 3 cm	80± 5	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040080-090	90± 3 cm	80± 5	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035100-090	90± 3 cm	100± 6	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040100-090	90± 3 cm	100± 6	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035120-090	90± 3 cm	120± 8	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040120-090	90± 3 cm	120± 8	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035150-090	90± 3 cm	150± 8	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040150-090	90± 3 cm	150± 8	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-035200-090	90± 3 cm	200± 8	3.5± 0.35	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-040200-090	90± 3 cm	200± 8	4.0± 0.4	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045005-090	90± 3 cm	5± 1	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050005-090	90± 3 cm	5± 1	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045010-090	90± 3 cm	10± 1	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050010-090	90± 3 cm	10± 1	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045015-090	90± 3 cm	15± 1	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050015-090	90± 3 cm	15± 1	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05

803-045020-090	90± 3 CM	20± 2	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050020-090	90± 3 CM	20± 2	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045030-090	90± 3 CM	30± 2	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050030-090	90± 3 CM	30± 2	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045040-090	90± 3 CM	40± 3	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050040-090	90± 3 CM	40± 3	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045060-090	90± 3 CM	60± 4	4.5± 0.45	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-050060-090	90± 3 CM	60± 4	5.0± 0.5	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-045080-090	90± 3 CM	80± 5	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050080-090	90± 3 CM	80± 5	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045100-090	90± 3 CM	100± 6	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050100-090	90± 3 CM	100± 6	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045120-090	90± 3 CM	120± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050120-090	90± 3 CM	120± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045150-090	90± 3 CM	150± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050150-090	90± 3 CM	150± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045200-090	90± 3 CM	200± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050200-090	90± 3 CM	200± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055005-090	90± 3 CM	5± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060005-090	90± 3 CM	5± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055010-090	90± 3 CM	10± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060010-090	90± 3 CM	10± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055015-090	90± 3 CM	15± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060015-090	90± 3 CM	15± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055020-090	90± 3 CM	20± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060020-090	90± 3 CM	20± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055030-090	90± 3 CM	30± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060030-090	90± 3 CM	30± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055040-090	90± 3 CM	40± 3	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060040-090	90± 3 CM	40± 3	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055060-090	90± 3 CM	60± 4	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060060-090	90± 3 CM	60± 4	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055080-090	90± 3 CM	80± 5	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060080-090	90± 3 CM	80± 5	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055100-090	90± 3 CM	100± 6	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060100-090	90± 3 CM	100± 6	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055120-090	90± 3 CM	120± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060120-090	90± 3 CM	120± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055150-090	90± 3 CM	150± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060150-090	90± 3 CM	150± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055200-090	90± 3 CM	200± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060200-090	90± 3 CM	200± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070005-090	90± 3 CM	5± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080005-090	90± 3 CM	5± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070010-090	90± 3 CM	10± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080010-090	90± 3 CM	10± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070015-090	90± 3 CM	15± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080015-090	90± 3 CM	15± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070020-090	90± 3 CM	20± 2	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080020-090	90± 3 CM	20± 2	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070030-090	90± 3 CM	30± 2	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080030-090	90± 3 CM	30± 2	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070040-090	90± 3 CM	40± 3	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080040-090	90± 3 CM	40± 3	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070060-090	90± 3 CM	60± 4	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080060-090	90± 3 CM	60± 4	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070080-090	90± 3 CM	80± 5	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080080-090	90± 3 CM	80± 5	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070100-090	90± 3 CM	100± 6	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080100-090	90± 3 CM	100± 6	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05



803-070120-090	90± 3 CM	120± 8	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080120-090	90± 3 CM	120± 8	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070150-090	90± 3 CM	150± 8	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080150-090	90± 3 CM	150± 8	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070200-090	90± 3 CM	200± 8	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080200-090	90± 3 CM	200± 8	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090005-090	90± 3 CM	5± 1	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100005-090	90± 3 CM	5± 1	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090010-090	90± 3 CM	10± 1	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100010-090	90± 3 CM	10± 1	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090015-090	90± 3 CM	15± 1	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100015-090	90± 3 CM	15± 1	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090020-090	90± 3 CM	20± 2	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100020-090	90± 3 CM	20± 2	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090030-090	90± 3 CM	30± 2	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100030-090	90± 3 CM	30± 2	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090040-090	90± 3 CM	40± 3	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100040-090	90± 3 CM	40± 3	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090060-090	90± 3 CM	60± 4	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100060-090	90± 3 CM	60± 4	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090080-090	90± 3 CM	80± 5	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100080-090	90± 3 CM	80± 5	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090100-090	90± 3 CM	100± 6	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100100-090	90± 3 CM	100± 6	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090120-090	90± 3 CM	120± 8	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100120-090	90± 3 CM	120± 8	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090150-090	90± 3 CM	150± 8	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100150-090	90± 3 CM	150± 8	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090200-090	90± 3 CM	200± 8	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100200-090	90± 3 CM	200± 8	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-015005-150	150± 3 CM	5± 1	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020005-150	150± 3 CM	5± 1	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015010-150	150± 3 CM	10± 1	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020010-150	150± 3 CM	10± 1	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015015-150	150± 3 CM	15± 1	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020015-150	150± 3 CM	15± 1	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015020-150	150± 3 CM	20± 2	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020020-150	150± 3 CM	20± 2	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015030-150	150± 3 CM	30± 2	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020030-150	150± 3 CM	30± 2	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015040-150	150± 3 CM	40± 3	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020040-150	150± 3 CM	40± 3	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015060-150	150± 3 CM	60± 4	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020060-150	150± 3 CM	60± 4	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015080-150	150± 3 CM	80± 5	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020080-150	150± 3 CM	80± 5	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015100-150	150± 3 CM	100± 6	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020100-150	150± 3 CM	100± 6	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015120-150	150± 3 CM	120± 8	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020120-150	150± 3 CM	120± 8	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015150-150	150± 3 CM	150± 8	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020150-150	150± 3 CM	150± 8	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-015200-150	150± 3 CM	200± 8	1.5± 0.15	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-020200-150	150± 3 CM	200± 8	2.0± 0.2	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025005-150	150± 3 CM	5± 1	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030005-150	150± 3 CM	5± 1	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025010-150	150± 3 CM	10± 1	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030010-150	150± 3 CM	10± 1	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-025015-150	150± 3 CM	15± 1	2.5± 0.25	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-030015-150	150± 3 CM	15± 1	3.0± 0.3	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05

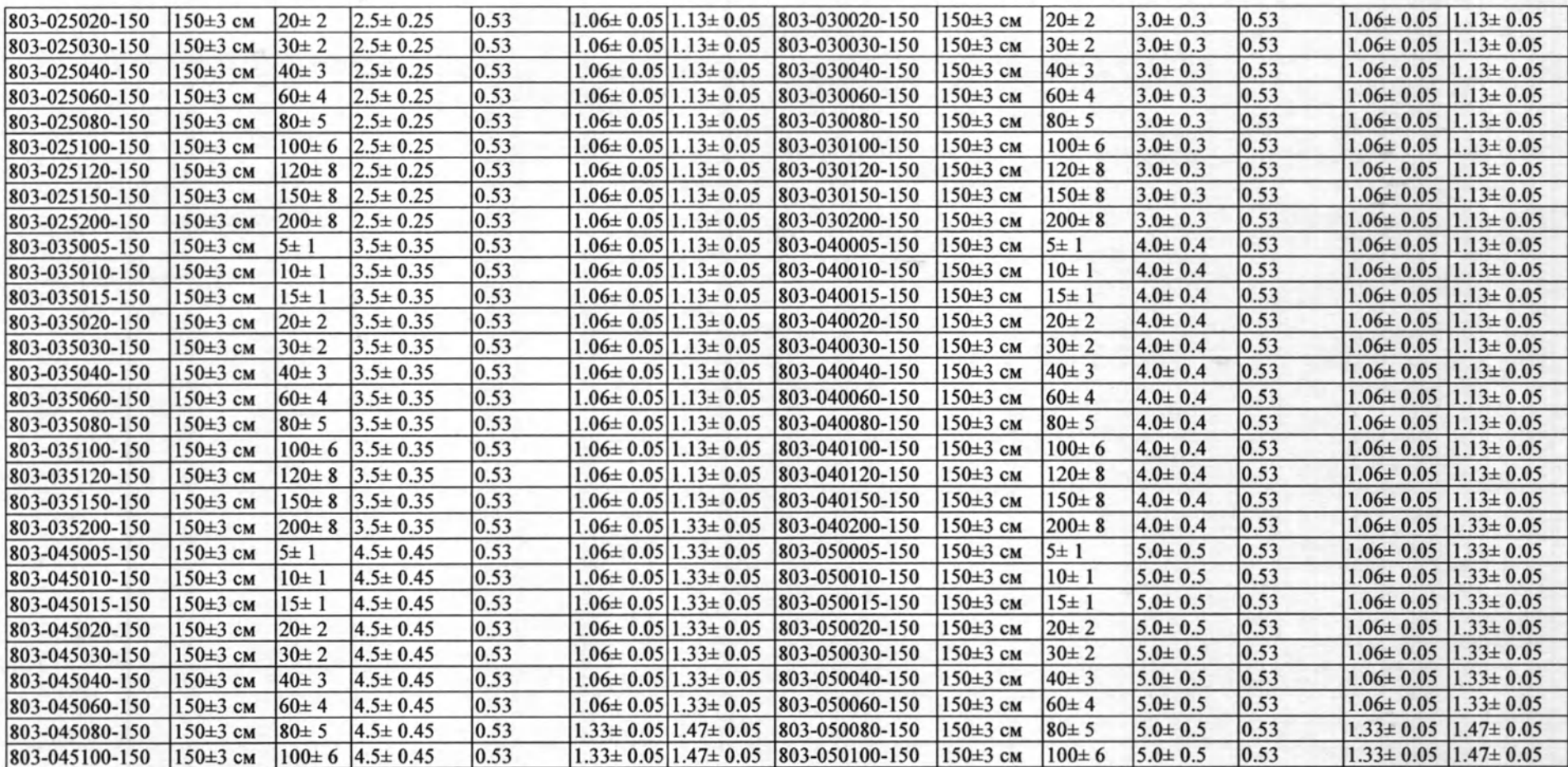



803-045120-150	150±3 cm	120± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050120-150	150±3 cm	120± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045150-150	150±3 cm	150± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050150-150	150±3 cm	150± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-045200-150	150±3 cm	200± 8	4.5± 0.45	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-050200-150	150±3 cm	200± 8	5.0± 0.5	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055005-150	150±3 cm	5± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05	803-060005-150	150±3 cm	5± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055010-150	150±3 cm	10± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.33± 0.05	803-060010-150	150±3 cm	10± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055015-150	150±3 cm	15± 1	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.33± 0.05	803-060015-150	150±3 cm	15± 1	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055020-150	150±3 cm	20± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.33± 0.05	803-060020-150	150±3 cm	20± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055030-150	150±3 cm	30± 2	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.33± 0.05	803-060030-150	150±3 cm	30± 2	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055040-150	150±3 cm	40± 3	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.33± 0.05	803-060040-150	150±3 cm	40± 3	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055060-150	150±3 cm	60± 4	5.5± 0.55	0.53	1.06± 0.05	1.33± 0.05	803-060060-150	150±3 cm	60± 4	6.0± 0.6	0.53	1.06± 0.05	1.13± 0.05
803-055080-150	150±3 cm	80± 5	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060080-150	150±3 cm	80± 5	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055100-150	150±3 cm	100± 6	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060100-150	150±3 cm	100± 6	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055120-150	150±3 cm	120± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060120-150	150±3 cm	120± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055150-150	150±3 cm	150± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060150-150	150±3 cm	150± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-055200-150	150±3 cm	200± 8	5.5± 0.55	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-060200-150	150±3 cm	200± 8	6.0± 0.6	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070005-150	150±3 cm	5± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080005-150	150±3 cm	5± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070010-150	150±3 cm	10± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080010-150	150±3 cm	10± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070015-150	150±3 cm	15± 1	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080015-150	150±3 cm	15± 1	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070020-150	150±3 cm	20± 2	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080020-150	150±3 cm	20± 2	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070030-150	150±3 cm	30± 2	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080030-150	150±3 cm	30± 2	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070040-150	150±3 cm	40± 3	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080040-150	150±3 cm	40± 3	8.0± 0.8	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-070060-150	150±3 cm	60± 4	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080060-150	150±3 cm	60± 4	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070080-150	150±3 cm	80± 5	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080080-150	150±3 cm	80± 5	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070100-150	150±3 cm	100± 6	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080100-150	150±3 cm	100± 6	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070120-150	150±3 cm	120± 8	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080120-150	150±3 cm	120± 8	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070150-150	150±3 cm	150± 8	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080150-150	150±3 cm	150± 8	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-070200-150	150±3 cm	200± 8	7.0± 0.7	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-080200-150	150±3 cm	200± 8	8.0± 0.8	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090005-150	150±3 cm	5± 1	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100005-150	150±3 cm	5± 1	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090010-150	150±3 cm	10± 1	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100010-150	150±3 cm	10± 1	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090015-150	150±3 cm	15± 1	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100015-150	150±3 cm	15± 1	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05

803-090020-150	150±3 см	20± 2	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100020-150	150±3 см	20± 2	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090030-150	150±3 см	30± 2	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100030-150	150±3 см	30± 2	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090040-150	150±3 см	40± 3	9.0± 0.9	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05	803-100040-150	150±3 см	40± 3	10.0± 1	0.53	1.33± 0.05	1.47± 0.05
803-090060-150	150±3 см	60± 4	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100060-150	150±3 см	60± 4	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090080-150	150±3 см	80± 5	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100080-150	150±3 см	80± 5	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090100-150	150±3 см	100± 6	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100100-150	150±3 см	100± 6	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090120-150	150±3 см	120± 8	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100120-150	150±3 см	120± 8	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090150-150	150±3 см	150± 8	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100150-150	150±3 см	150± 8	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05
803-090200-150	150±3 см	200± 8	9.0± 0.9	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05	803-100200-150	150±3 см	200± 8	10.0± 1	0.53	1.48± 0.05	1.73± 0.05

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,018 дюйма (0.46 мм)

Таблица 7.8.3 – Технические характеристики катетера баллонного дилатационного периферического в вариантах исполнения Atropos SC
РТА

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), а	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), а	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
819-030020-040	40 см	20± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-030030-040	40 см	30± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70
819-040020-040	40 см	20± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70	819-040030-040	40 см	30± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-050020-040	40 см	20± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-050030-040	40 см	30± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73
819-060020-040	40 см	20± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73	819-060030-040	40 см	30± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-070020-040	40 см	20± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-070030-040	40 см	30± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73
819-080020-040	40 см	20± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73	819-080030-040	40 см	30± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-030040-040	40 см	40± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-030060-040	40 см	60± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70
819-040040-040	40 см	40± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70	819-040060-040	40 см	60± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-050040-040	40 см	40± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-050060-040	40 см	60± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73
819-060040-040	40 см	40± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73	819-060060-040	40 см	60± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-070040-040	40 см	40± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-070060-040	40 см	60± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73

819-080040-040	40 CM	40± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73	819-080060-040	40 CM	60± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-030020-070	70 CM	20± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040020-070	70 CM	20± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030030-070	70 CM	30± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040030-070	70 CM	30± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030040-070	70 CM	40± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040040-070	70 CM	40± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030060-070	70 CM	60± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040060-070	70 CM	60± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030080-070	70 CM	80± 5	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040080-070	70 CM	80± 5	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030100-070	70 CM	100± 6	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040100-070	70 CM	100± 6	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030120-070	70 CM	120± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040120-070	70 CM	120± 8	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030150-070	70 CM	150± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040150-070	70 CM	150± 8	4.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
819-030200-070	70 CM	200± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040200-070	70 CM	200± 8	4.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
819-050020-070	70 CM	20± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060020-070	70 CM	20± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050030-070	70 CM	30± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060030-070	70 CM	30± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050040-070	70 CM	40± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060040-070	70 CM	40± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050060-070	70 CM	60± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060060-070	70 CM	60± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050080-070	70 CM	80± 5	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060080-070	70 CM	80± 5	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050100-070	70 CM	100± 6	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060100-070	70 CM	100± 6	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050120-070	70 CM	120± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060120-070	70 CM	120± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050150-070	70 CM	150± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060150-070	70 CM	150± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050200-070	70 CM	200± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060200-070	70 CM	200± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-070020-070	70 CM	20± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080020-070	70 CM	20± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070030-070	70 CM	30± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080030-070	70 CM	30± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070040-070	70 CM	40± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080040-070	70 CM	40± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070060-070	70 CM	60± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080060-070	70 CM	60± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070080-070	70 CM	80± 5	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080080-070	70 CM	80± 5	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070100-070	70 CM	100± 6	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080100-070	70 CM	100± 6	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070120-070	70 CM	120± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080120-070	70 CM	120± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070150-070	70 CM	150± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080150-070	70 CM	150± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070200-070	70 CM	200± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080200-070	70 CM	200± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-090020-070	70 CM	20± 2	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100020-070	70 CM	20± 2	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090030-070	70 CM	30± 2	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100030-070	70 CM	30± 2	10.0± 1	0.96	1.93	1.93

819-090040-070	70 CM	40± 3	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100040-070	70 CM	40± 3	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090060-070	70 CM	60± 3	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100060-070	70 CM	60± 3	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090080-070	70 CM	80± 5	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100080-070	70 CM	80± 5	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090100-070	70 CM	100± 6	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100100-070	70 CM	100± 6	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090120-070	70 CM	120± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100120-070	70 CM	120± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090150-070	70 CM	150± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100150-070	70 CM	150± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090200-070	70 CM	200± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100200-070	70 CM	200± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-030020-090	90 CM	20± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040020-090	90 CM	20± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030030-090	90 CM	30± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040030-090	90 CM	30± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030040-090	90 CM	40± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040040-090	90 CM	40± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030060-090	90 CM	60± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040060-090	90 CM	60± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030080-090	90 CM	80± 5	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040080-090	90 CM	80± 5	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030100-090	90 CM	100± 6	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040100-090	90 CM	100± 6	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030120-090	90 CM	120± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040120-090	90 CM	120± 8	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70

819-030150-090	90 CM	150± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040150-090	90 CM	150± 8	4.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
819-030200-090	90 CM	200± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040200-090	90 CM	200± 8	4.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
819-050020-090	90 CM	20± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060020-090	90 CM	20± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050030-090	90 CM	30± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060030-090	90 CM	30± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050040-090	90 CM	40± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060040-090	90 CM	40± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050060-090	90 CM	60± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060060-090	90 CM	60± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050080-090	90 CM	80± 5	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060080-090	90 CM	80± 5	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050100-090	90 CM	100± 6	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060100-090	90 CM	100± 6	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050120-090	90 CM	120± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060120-090	90 CM	120± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050150-090	90 CM	150± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060150-090	90 CM	150± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050200-090	90 CM	200± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060200-090	90 CM	200± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-070020-090	90 CM	20± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080020-090	90 CM	20± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070030-090	90 CM	30± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080030-090	90 CM	30± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070040-090	90 CM	40± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080040-090	90 CM	40± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070060-090	90 CM	60± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080060-090	90 CM	60± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070080-090	90 CM	80± 5	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080080-090	90 CM	80± 5	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73



819-070100-090	90 CM	100± 6	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080100-090	90 CM	100± 6	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070120-090	90 CM	120± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080120-090	90 CM	120± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070150-090	90 CM	150± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080150-090	90 CM	150± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070200-090	90 CM	200± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080200-090	90 CM	200± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-090020-090	90 CM	20± 2	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100020-090	90 CM	20± 2	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090030-090	90 CM	30± 2	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100030-090	90 CM	30± 2	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090040-090	90 CM	40± 3	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100040-090	90 CM	40± 3	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090060-090	90 CM	60± 3	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100060-090	90 CM	60± 3	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090080-090	90 CM	80± 5	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100080-090	90 CM	80± 5	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090100-090	90 CM	100± 6	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100100-090	90 CM	100± 6	10.0± 1	0.96	1.93	1.93

819-090120-090	90 CM	120± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100120-090	90 CM	120± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090150-090	90 CM	150± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100150-090	90 CM	150± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090200-090	90 CM	200± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100200-090	90 CM	200± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-030020-150	150 CM	20± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040020-150	150 CM	20± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030030-150	150 CM	30± 2	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040030-150	150 CM	30± 2	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030040-150	150 CM	40± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040040-150	150 CM	40± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030060-150	150 CM	60± 3	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040060-150	150 CM	60± 3	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030080-150	150 CM	80± 5	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040080-150	150 CM	80± 5	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030100-150	150 CM	100± 6	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040100-150	150 CM	100± 6	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030120-150	150 CM	120± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040120-150	150 CM	120± 8	4.0± 0.4	0.96	1.70	1.70
819-030150-150	150 CM	150± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040150-150	150 CM	150± 8	4.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
819-030200-150	150 CM	200± 8	3.0± 0.3	0.96	1.70	1.70	819-040200-150	150 CM	200± 8	4.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
819-050020-150	150 CM	20± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060020-150	150 CM	20± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050030-150	150 CM	30± 2	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060030-150	150 CM	30± 2	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050040-150	150 CM	40± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060040-150	150 CM	40± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050060-150	150 CM	60± 3	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060060-150	150 CM	60± 3	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050080-150	150 CM	80± 5	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060080-150	150 CM	80± 5	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050100-150	150 CM	100± 6	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060100-150	150 CM	100± 6	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050120-150	150 CM	120± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060120-150	150 CM	120± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-050150-150	150 CM	150± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060150-150	150 CM	150± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73

819-050200-150	150 CM	200± 8	5.0± 0.5	0.96	1.73	1.73	819-060200-150	150 CM	200± 8	6.0± 0.6	0.96	1.73	1.73
819-070020-150	150 CM	20± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080020-150	150 CM	20± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070030-150	150 CM	30± 2	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080030-150	150 CM	30± 2	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070040-150	150 CM	40± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080040-150	150 CM	40± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070060-150	150 CM	60± 3	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080060-150	150 CM	60± 3	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070080-150	150 CM	80± 5	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080080-150	150 CM	80± 5	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070100-150	150 CM	100± 6	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080100-150	150 CM	100± 6	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070120-150	150 CM	120± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080120-150	150 CM	120± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070150-150	150 CM	150± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080150-150	150 CM	150± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-070200-150	150 CM	200± 8	7.0± 0.7	0.96	1.73	1.73	819-080200-150	150 CM	200± 8	8.0± 0.8	0.96	1.73	1.73
819-090020-150	150 CM	20± 2	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100020-150	150 CM	20± 2	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090030-150	150 CM	30± 2	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100030-150	150 CM	30± 2	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090040-150	150 CM	40± 3	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100040-150	150 CM	40± 3	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090060-150	150 CM	60± 3	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100060-150	150 CM	60± 3	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090080-150	150 CM	80± 5	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100080-150	150 CM	80± 5	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090100-150	150 CM	100± 6	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100100-150	150 CM	100± 6	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090120-150	150 CM	120± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100120-150	150 CM	120± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090150-150	150 CM	150± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100150-150	150 CM	150± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93
819-090200-150	150 CM	200± 8	9.0± 0.9	0.96	1.93	1.93	819-100200-150	150 CM	200± 8	10.0± 1	0.96	1.93	1.93

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,035 дюйма (0.89 мм)

Таблица 7.9.1 – Технические характеристики катетера баллонного дилатационного периферического в вариантах исполнения Castor NC

РТА

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), а	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), а	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
816-020010-070	70 см	10± 1	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025010-070	70 см	10± 1	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020015-070	70 см	15± 1	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025015-070	70 см	15± 1	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020020-070	70 см	20± 2	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025020-070	70 см	20± 2	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020030-070	70 см	30± 3	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025030-070	70 см	30± 3	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020040-070	70 см	40± 3	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025040-070	70 см	40± 3	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020060-070	70 см	60± 4	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025060-070	70 см	60± 4	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020080-070	70 см	80± 5	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025080-070	70 см	80± 5	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020100-070	70 см	100± 6	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025100-070	70 см	100± 6	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020150-070	70 см	150± 8	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025150-070	70 см	150± 8	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-030010-070	70 см	10± 1	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035010-070	70 см	10± 1	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030015-070	70 см	15± 1	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035015-070	70 см	15± 1	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030020-070	70 см	20± 2	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035020-070	70 см	20± 2	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030030-070	70 см	30± 3	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035030-070	70 см	30± 3	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030040-070	70 см	40± 3	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035040-070	70 см	40± 3	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030060-070	70 см	60± 4	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035060-070	70 см	60± 4	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030080-070	70 см	80± 5	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035080-070	70 см	80± 5	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030100-070	70 см	100± 6	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035100-070	70 см	100± 6	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030150-070	70 см	150± 8	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035150-070	70 см	150± 8	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-040010-070	70 см	10± 1	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045010-070	70 см	10± 1	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14

816-040015-070	70 CM	15± 1	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045015-070	70 CM	15± 1	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040020-070	70 CM	20± 2	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045020-070	70 CM	20± 2	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040030-070	70 CM	30± 3	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045030-070	70 CM	30± 3	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040040-070	70 CM	40± 3	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045040-070	70 CM	40± 3	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040060-070	70 CM	60± 4	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045060-070	70 CM	60± 4	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040080-070	70 CM	80± 5	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045080-070	70 CM	80± 5	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040100-070	70 CM	100± 6	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045100-070	70 CM	100± 6	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040150-070	70 CM	150± 8	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045150-070	70 CM	150± 8	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-050010-070	70 CM	10± 1	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055010-070	70 CM	10± 1	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050015-070	70 CM	15± 1	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055015-070	70 CM	15± 1	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050020-070	70 CM	20± 2	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055020-070	70 CM	20± 2	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050030-070	70 CM	30± 3	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055030-070	70 CM	30± 3	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050040-070	70 CM	40± 3	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055040-070	70 CM	40± 3	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050060-070	70 CM	60± 4	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055060-070	70 CM	60± 4	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050080-070	70 CM	80± 5	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055080-070	70 CM	80± 5	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050100-070	70 CM	100± 6	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055100-070	70 CM	100± 6	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050150-070	70 CM	150± 8	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055150-070	70 CM	150± 8	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-060010-070	70 CM	10± 1	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070010-070	70 CM	10± 1	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060015-070	70 CM	15± 1	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070015-070	70 CM	15± 1	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060020-070	70 CM	20± 2	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070020-070	70 CM	20± 2	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060030-070	70 CM	30± 3	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070030-070	70 CM	30± 3	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060040-070	70 CM	40± 3	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070040-070	70 CM	40± 3	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060060-070	70 CM	60± 4	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070060-070	70 CM	60± 4	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060080-070	70 CM	80± 5	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070080-070	70 CM	80± 5	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060100-070	70 CM	100± 6	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070100-070	70 CM	100± 6	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060150-070	70 CM	150± 8	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070150-070	70 CM	150± 8	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-080010-070	70 CM	10± 1	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020010-090	90 CM	10± 1	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-080015-070	70 CM	15± 1	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020015-090	90 CM	15± 1	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-080020-070	70 CM	20± 2	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020020-090	90 CM	20± 2	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-080030-070	70 CM	30± 3	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020030-090	90 CM	30± 3	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-080040-070	70 CM	40± 3	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020040-090	90 CM	40± 3	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06



816-080060-070	70 CM	60± 4	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020060-090	90 CM	60± 4	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-080080-070	70 CM	80± 5	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020080-090	90 CM	80± 5	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-080100-070	70 CM	100± 6	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020100-090	90 CM	100± 6	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-080150-070	70 MM	150± 8	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14	816-020150-090	90 CM	150± 8	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06
816-025010-090	90 CM	10± 1	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030010-090	90 CM	10± 1	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025015-090	90 CM	15± 1	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030015-090	90 CM	15± 1	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025020-090	90 CM	20± 2	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030020-090	90 CM	20± 2	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025030-090	90 CM	30± 3	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030030-090	90 CM	30± 3	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025040-090	90 CM	40± 3	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030040-090	90 CM	40± 3	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025060-090	90 CM	60± 4	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030060-090	90 CM	60± 4	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025080-090	90 CM	80± 5	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030080-090	90 CM	80± 5	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025100-090	90 CM	100± 6	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030100-090	90 CM	100± 6	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-025150-090	90 CM	150± 8	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06	816-030150-090	90 CM	150± 8	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06
816-035010-090	90 CM	10± 1	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040010-090	90 CM	10± 1	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035015-090	90 CM	15± 1	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040015-090	90 CM	15± 1	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035020-090	90 CM	20± 2	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040020-090	90 CM	20± 2	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035030-090	90 CM	30± 3	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040030-090	90 CM	30± 3	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035040-090	90 CM	40± 3	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040040-090	90 CM	40± 3	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035060-090	90 CM	60± 4	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040060-090	90 CM	60± 4	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035080-090	90 CM	80± 5	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040080-090	90 CM	80± 5	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035100-090	90 CM	100± 6	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040100-090	90 CM	100± 6	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-035150-090	90 CM	150± 8	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06	816-040150-090	90 CM	150± 8	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06
816-045010-090	90 CM	10± 1	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050010-090	90 CM	10± 1	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045015-090	90 CM	15± 1	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050015-090	90 CM	15± 1	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045020-090	90 CM	20± 2	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050020-090	90 CM	20± 2	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045030-090	90 CM	30± 3	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050030-090	90 CM	30± 3	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045040-090	90 CM	40± 3	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050040-090	90 CM	40± 3	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045060-090	90 CM	60± 4	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050060-090	90 CM	60± 4	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045080-090	90 CM	80± 5	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050080-090	90 CM	80± 5	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045100-090	90 CM	100± 6	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050100-090	90 CM	100± 6	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14
816-045150-090	90 CM	150± 8	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14	816-050150-090	90 CM	150± 8	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14

816-055010-090	90 CM	10± 1	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060010-090	90 CM	10± 1	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055015-090	90 CM	15± 1	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060015-090	90 CM	15± 1	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055020-090	90 CM	20± 2	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060020-090	90 CM	20± 2	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055030-090	90 CM	30± 3	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060030-090	90 CM	30± 3	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055040-090	90 CM	40± 3	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060040-090	90 CM	40± 3	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055060-090	90 CM	60± 4	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060060-090	90 CM	60± 4	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055080-090	90 CM	80± 5	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060080-090	90 CM	80± 5	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055100-090	90 CM	100± 6	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060100-090	90 CM	100± 6	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-055150-090	90 CM	150± 8	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14	816-060150-090	90 CM	150± 8	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14
816-070010-090	90 CM	10± 1	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080010-090	90 CM	10± 1	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070015-090	90 CM	15± 1	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080015-090	90 CM	15± 1	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070020-090	90 CM	20± 2	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080020-090	90 CM	20± 2	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070030-090	90 CM	30± 3	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080030-090	90 CM	30± 3	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070040-090	90 CM	40± 3	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080040-090	90 CM	40± 3	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070060-090	90 CM	60± 4	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080060-090	90 CM	60± 4	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070080-090	90 CM	80± 5	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080080-090	90 CM	80± 5	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070100-090	90 CM	100± 6	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080100-090	90 CM	100± 6	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-070150-090	90 CM	150± 8	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14	816-080150-090	90 CM	150± 8	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14
816-020010-150	150 CM	10± 1	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025010-150	150 CM	10± 1	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020015-150	150 CM	15± 1	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025015-150	150 CM	15± 1	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020020-150	150 CM	20± 2	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025020-150	150 CM	20± 2	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020030-150	150 CM	30± 3	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025030-150	150 CM	30± 3	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020040-150	150 CM	40± 3	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025040-150	150 CM	40± 3	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020060-150	150 CM	60± 4	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025060-150	150 CM	60± 4	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020080-150	150 CM	80± 5	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025080-150	150 CM	80± 5	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020100-150	150 CM	100± 6	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025100-150	150 CM	100± 6	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-020150-150	150 CM	150± 8	2.0± 0.1	0.42	0.86	1.06	816-025150-150	150 CM	150± 8	2.5± 0.13	0.42	0.86	1.06
816-030010-150	150 CM	10± 1	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035010-150	150 CM	10± 1	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030015-150	150 CM	15± 1	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035015-150	150 CM	15± 1	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030020-150	150 CM	20± 2	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035020-150	150 CM	20± 2	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030030-150	150 CM	30± 3	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035030-150	150 CM	30± 3	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06

816-030040-150	150 cm	40± 3	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035040-150	150 cm	40± 3	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030060-150	150 cm	60± 4	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035060-150	150 cm	60± 4	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030080-150	150 cm	80± 5	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035080-150	150 cm	80± 5	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030100-150	150 cm	100± 6	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035100-150	150 cm	100± 6	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-030150-150	150 cm	150± 8	3.0± 0.15	0.42	0.86	1.06	816-035150-150	150 cm	150± 8	3.5± 0.18	0.42	0.86	1.06
816-040010-150	150 cm	10± 1	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045010-150	150 cm	10± 1	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040015-150	150 cm	15± 1	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045015-150	150 cm	15± 1	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040020-150	150 cm	20± 2	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045020-150	150 cm	20± 2	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040030-150	150 cm	30± 3	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045030-150	150 cm	30± 3	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040040-150	150 cm	40± 3	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045040-150	150 cm	40± 3	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040060-150	150 cm	60± 4	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045060-150	150 cm	60± 4	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040080-150	150 cm	80± 5	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045080-150	150 cm	80± 5	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040100-150	150 cm	100± 6	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045100-150	150 cm	100± 6	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-040150-150	150 cm	150± 8	4.0± 0.2	0.42	0.86	1.06	816-045150-150	150 cm	150± 8	4.5± 0.22	0.42	1.06	1.14
816-050010-150	150 cm	10± 1	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055010-150	150 cm	10± 1	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050015-150	150 cm	15± 1	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055015-150	150 cm	15± 1	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050020-150	150 cm	20± 2	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055020-150	150 cm	20± 2	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050030-150	150 cm	30± 3	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055030-150	150 cm	30± 3	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050040-150	150 cm	40± 3	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055040-150	150 cm	40± 3	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050060-150	150 cm	60± 4	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055060-150	150 cm	60± 4	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050080-150	150 cm	80± 5	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055080-150	150 cm	80± 5	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050100-150	150 cm	100± 6	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055100-150	150 cm	100± 6	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-050150-150	150 cm	150± 8	5.0± 0.25	0.42	1.06	1.14	816-055150-150	150 cm	150± 8	5.5± 0.28	0.42	1.06	1.14
816-060010-150	150 cm	10± 1	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070010-150	150 cm	10± 1	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060015-150	150 cm	15± 1	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070015-150	150 cm	15± 1	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060020-150	150 cm	20± 2	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070020-150	150 cm	20± 2	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060030-150	150 cm	30± 3	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070030-150	150 cm	30± 3	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060040-150	150 cm	40± 3	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070040-150	150 cm	40± 3	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060060-150	150 cm	60± 4	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070060-150	150 cm	60± 4	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060080-150	150 cm	80± 5	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070080-150	150 cm	80± 5	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-060100-150	150 cm	100± 6	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070100-150	150 cm	100± 6	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14



816-060150-150	150 см	150± 8	6.0± 0.3	0.42	1.06	1.14	816-070150-150	150 см	150± 8	7.0± 0.35	0.42	1.06	1.14
816-080010-150	150 см	10± 1	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080015-150	150 см	15± 1	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080020-150	150 см	20± 2	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080030-150	150 см	30± 3	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080040-150	150 см	40± 3	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080060-150	150 см	60± 4	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080080-150	150 см	80± 5	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080100-150	150 см	100± 6	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							
816-080150-150	150 см	150± 8	8.0± 0.4	0.42	1.06	1.14							

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,014 дюйма (0.36 мм)

Таблица 7.9.2 – Технические характеристики катетера баллонного дилатационного периферического в вариантах исполнения Achilles NC PTA

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
804-030020-040	40 см	20± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-030030-040	40 см	30± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-035020-040	40 см	20± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-035030-040	40 см	30± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-040020-040	40 см	20± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-040030-040	40 см	30± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-045020-040	40 см	20± 2	4.5 ± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-045030-040	40 см	30± 2	4.5 ± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-050020-040	40 см	20± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-050030-040	40 см	30± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13
804-055020-040	40 см	20± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-055030-040	40 см	30± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-060020-040	40 см	20± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-060030-040	40 см	30± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-070020-040	40 см	20± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-070030-040	40 см	30± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-080020-040	40 см	20± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47	804-080030-040	40 см	30± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47
804-030040-040	40 см	40± 3	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-030060-040	40 см	60± 4	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-035040-040	40 см	40± 3	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-035060-040	40 см	60± 4	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-040040-040	40 см	40± 3	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-040060-040	40 см	60± 4	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-045040-040	40 см	40± 3	4.5 ± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-045060-040	40 см	60± 4	4.5 ± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-050040-040	40 см	40± 3	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-050060-040	40 см	60± 4	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13
804-055040-040	40 см	40± 3	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-055060-040	40 см	60± 4	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-060040-040	40 см	40± 3	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-060060-040	40 см	60± 4	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-070040-040	40 см	40± 3	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-070060-040	40 см	60± 4	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-080040-040	40 см	40± 3	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47	804-080060-040	40 см	60± 4	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47
804-020010-070	70 см	10± 1	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025010-070	70 см	10± 1	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020015-070	70 см	15± 1	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025015-070	70 см	15± 1	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020020-070	70 см	20± 2	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025020-070	70 см	20± 2	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), а	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), а	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
804-020030-070	70 см	30± 2	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025030-070	70 см	30± 2	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020040-070	70 см	40± 3	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025040-070	70 см	40± 3	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020060-070	70 см	60± 4	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025060-070	70 см	60± 4	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020080-070	70 см	80± 5	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025080-070	70 см	80± 5	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020100-070	70 см	100± 6	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025100-070	70 см	100± 6	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020150-070	70 см	150± 8	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025150-070	70 см	150± 8	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-030010-070	70 см	10± 1	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035010-070	70 см	10± 1	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030015-070	70 см	15± 1	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035015-070	70 см	15± 1	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030020-070	70 см	20± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035020-070	70 см	20± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030030-070	70 см	30± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035030-070	70 см	30± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030040-070	70 см	40± 3	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035040-070	70 см	40± 3	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030060-070	70 см	60± 4	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035060-070	70 см	60± 4	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030080-070	70 см	80± 5	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035080-070	70 см	80± 5	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030100-070	70 см	100± 6	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035100-070	70 см	100± 6	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030150-070	70 см	150± 8	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035150-070	70 см	150± 8	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-040010-070	70 см	10± 1	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045010-070	70 см	10± 1	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040015-070	70 см	15± 1	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045015-070	70 см	15± 1	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040020-070	70 см	20± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045020-070	70 см	20± 2	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040030-070	70 см	30± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045030-070	70 см	30± 2	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040040-070	70 см	40± 3	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045040-070	70 см	40± 3	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040060-070	70 см	60± 4	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045060-070	70 см	60± 4	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040080-070	70 см	80± 5	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045080-070	70 см	80± 5	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47
804-040100-070	70 см	100± 6	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045100-070	70 см	100± 6	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47
804-040150-070	70 см	150± 8	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045150-070	70 см	150± 8	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47
804-050010-070	70 см	10± 1	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055010-070	70 см	10± 1	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)
804-050015-070	70 см	15± 1	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055015-070	70 см	15± 1	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050020-070	70 см	20± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055020-070	70 см	20± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050030-070	70 см	30± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055030-070	70 см	30± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050040-070	70 см	40± 3	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055040-070	70 см	40± 3	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050060-070	70 см	60± 4	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055060-070	70 см	60± 4	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050080-070	70 см	80± 5	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47	804-055080-070	70 см	80± 5	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47
804-050100-070	70 см	100± 6	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47	804-055100-070	70 см	100± 6	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47
804-050150-070	70 см	150± 8	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47	804-055150-070	70 см	150± 8	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47
804-060010-070	70 см	10± 1	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070010-070	70 см	10± 1	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060015-070	70 см	15± 1	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070015-070	70 см	15± 1	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060020-070	70 см	20± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070020-070	70 см	20± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060030-070	70 см	30± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070030-070	70 см	30± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060040-070	70 см	40± 3	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070040-070	70 см	40± 3	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060060-070	70 см	60± 4	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070060-070	70 см	60± 4	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060080-070	70 см	80± 5	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47	804-070080-070	70 см	80± 5	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060100-070	70 см	100± 6	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47	804-070100-070	70 см	100± 6	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060150-070	70 см	150± 8	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47	804-070150-070	70 см	150± 8	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-080010-070	70 см	10± 1	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47	804-020010-090	90 см	10± 1	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-080015-070	70 см	15± 1	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47	804-020015-090	90 см	15± 1	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-080020-070	70 см	20± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47	804-020020-090	90 см	20± 2	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-080030-070	70 см	30± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47	804-020030-090	90 см	30± 2	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-080040-070	70 см	40± 3	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47	804-020040-090	90 см	40± 3	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-080060-070	70 см	60± 4	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73	804-020060-090	90 см	60± 4	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-080080-070	70 см	80± 5	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73	804-020080-090	90 см	80± 5	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-080100-070	70 см	100± 6	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73	804-020100-090	90 см	100± 6	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)
804-080150-070	70 см	150± 8	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73	804-020150-090	90 см	150± 8	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13
804-025010-090	90 см	10± 1	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030010-090	90 см	10± 1	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025015-090	90 см	15± 1	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030015-090	90 см	15± 1	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025020-090	90 см	20± 2	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030020-090	90 см	20± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025030-090	90 см	30± 2	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030030-090	90 см	30± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025040-090	90 см	40± 3	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030040-090	90 см	40± 3	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025060-090	90 см	60± 4	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030060-090	90 см	60± 4	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025080-090	90 см	80± 5	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030080-090	90 см	80± 5	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025100-090	90 см	100± 6	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030100-090	90 см	100± 6	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-025150-090	90 см	150± 8	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13	804-030150-090	90 см	150± 8	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13
804-035010-090	90 см	10± 1	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040010-090	90 см	10± 1	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035015-090	90 см	15± 1	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040015-090	90 см	15± 1	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035020-090	90 см	20± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040020-090	90 см	20± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035030-090	90 см	30± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040030-090	90 см	30± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035040-090	90 см	40± 3	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040040-090	90 см	40± 3	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035060-090	90 см	60± 4	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040060-090	90 см	60± 4	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035080-090	90 см	80± 5	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040080-090	90 см	80± 5	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035100-090	90 см	100± 6	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040100-090	90 см	100± 6	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-035150-090	90 см	150± 8	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13	804-040150-090	90 см	150± 8	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13
804-045010-090	90 см	10± 1	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-050010-090	90 см	10± 1	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13
804-045015-090	90 см	15± 1	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-050015-090	90 см	15± 1	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13
804-045020-090	90 см	20± 2	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-050020-090	90 см	20± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13
804-045030-090	90 см	30± 2	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-050030-090	90 см	30± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13
804-045040-090	90 см	40± 3	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-050040-090	90 см	40± 3	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13
804-045060-090	90 см	60± 4	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13	804-050060-090	90 см	60± 4	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)
804-045080-090	90 см	80± 5	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47	804-050080-090	90 см	80± 5	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47
804-045100-090	90 см	100± 6	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47	804-050100-090	90 см	100± 6	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47
804-045150-090	90 см	150± 8	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47	804-050150-090	90 см	150± 8	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47
804-055010-090	90 см	10± 1	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-060010-090	90 см	10± 1	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-055015-090	90 см	15± 1	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-060015-090	90 см	15± 1	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-055020-090	90 см	20± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-060020-090	90 см	20± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-055030-090	90 см	30± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-060030-090	90 см	30± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-055040-090	90 см	40± 3	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-060040-090	90 см	40± 3	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-055060-090	90 см	60± 4	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13	804-060060-090	90 см	60± 4	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13
804-055080-090	90 см	80± 5	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47	804-060080-090	90 см	80± 5	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47
804-055100-090	90 см	100± 6	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47	804-060100-090	90 см	100± 6	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47
804-055150-090	90 см	150± 8	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47	804-060150-090	90 см	150± 8	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47
804-070010-090	90 см	10± 1	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080010-090	90 см	10± 1	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47
804-070015-090	90 см	15± 1	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080015-090	90 см	15± 1	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47
804-070020-090	90 см	20± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080020-090	90 см	20± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47
804-070030-090	90 см	30± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080030-090	90 см	30± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47
804-070040-090	90 см	40± 3	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080040-090	90 см	40± 3	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47
804-070060-090	90 см	60± 4	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080060-090	90 см	60± 4	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73
804-070080-090	90 см	80± 5	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080080-090	90 см	80± 5	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73
804-070100-090	90 см	100± 6	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080100-090	90 см	100± 6	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73
804-070150-090	90 см	150± 8	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47	804-080150-090	90 см	150± 8	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73
804-020010-150	150 см	10± 1	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025010-150	150 см	10± 1	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020015-150	150 см	15± 1	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025015-150	150 см	15± 1	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020020-150	150 см	20± 2	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025020-150	150 см	20± 2	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020030-150	150 см	30± 2	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025030-150	150 см	30± 2	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)
804-020040-150	150 см	40± 3	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025040-150	150 см	40± 3	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020060-150	150 см	60± 4	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025060-150	150 см	60± 4	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020080-150	150 см	80± 5	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025080-150	150 см	80± 5	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020100-150	150 см	100± 6	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025100-150	150 см	100± 6	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-020150-150	150 см	150± 8	2.0± 0.1	0.53	1.06	1.13	804-025150-150	150 см	150± 8	2.5± 0.13	0.53	1.06	1.13
804-030010-150	150 см	10± 1	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035010-150	150 см	10± 1	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030015-150	150 см	15± 1	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035015-150	150 см	15± 1	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030020-150	150 см	20± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035020-150	150 см	20± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030030-150	150 см	30± 2	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035030-150	150 см	30± 2	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030040-150	150 см	40± 3	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035040-150	150 см	40± 3	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030060-150	150 см	60± 4	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035060-150	150 см	60± 4	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030080-150	150 см	80± 5	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035080-150	150 см	80± 5	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030100-150	150 см	100± 6	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035100-150	150 см	100± 6	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-030150-150	150 см	150± 8	3.0± 0.15	0.53	1.06	1.13	804-035150-150	150 см	150± 8	3.5± 0.18	0.53	1.06	1.13
804-040010-150	150 см	10± 1	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045010-150	150 см	10± 1	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040015-150	150 см	15± 1	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045015-150	150 см	15± 1	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040020-150	150 см	20± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045020-150	150 см	20± 2	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040030-150	150 см	30± 2	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045030-150	150 см	30± 2	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040040-150	150 см	40± 3	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045040-150	150 см	40± 3	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040060-150	150 см	60± 4	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045060-150	150 см	60± 4	4.5± 0.22	0.53	1.06	1.13
804-040080-150	150 см	80± 5	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045080-150	150 см	80± 5	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47
804-040100-150	150 см	100± 6	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045100-150	150 см	100± 6	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47
804-040150-150	150 см	150± 8	4.0± 0.2	0.53	1.06	1.13	804-045150-150	150 см	150± 8	4.5± 0.22	0.53	1.33	1.47
804-050010-150	150 см	10± 1	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055010-150	150 см	10± 1	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050015-150	150 см	15± 1	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055015-150	150 см	15± 1	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
804-050020-150	150 см	20± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055020-150	150 см	20± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050030-150	150 см	30± 2	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055030-150	150 см	30± 2	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050040-150	150 см	40± 3	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055040-150	150 см	40± 3	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050060-150	150 см	60± 4	5.0± 0.25	0.53	1.06	1.13	804-055060-150	150 см	60± 4	5.5± 0.28	0.53	1.06	1.13
804-050080-150	150 см	80± 5	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47	804-055080-150	150 см	80± 5	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47
804-050100-150	150 см	100± 6	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47	804-055100-150	150 см	100± 6	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47
804-050150-150	150 см	150± 8	5.0± 0.25	0.53	1.33	1.47	804-055150-150	150 см	150± 8	5.5± 0.28	0.53	1.33	1.47
804-060010-150	150 см	10± 1	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070010-150	150 см	10± 1	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060015-150	150 см	15± 1	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070015-150	150 см	15± 1	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060020-150	150 см	20± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070020-150	150 см	20± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060030-150	150 см	30± 2	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070030-150	150 см	30± 2	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060040-150	150 см	40± 3	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070040-150	150 см	40± 3	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060060-150	150 см	60± 4	6.0± 0.3	0.53	1.06	1.13	804-070060-150	150 см	60± 4	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060080-150	150 см	80± 5	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47	804-070080-150	150 см	80± 5	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060100-150	150 см	100± 6	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47	804-070100-150	150 см	100± 6	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-060150-150	150 см	150± 8	6.0± 0.3	0.53	1.33	1.47	804-070150-150	150 см	150± 8	7.0± 0.35	0.53	1.33	1.47
804-080010-150	150 см	10± 1	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47							
804-080015-150	150 см	15± 1	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47							
804-080020-150	150 см	20± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47							
804-080030-150	150 см	30± 2	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47							
804-080040-150	150 см	40± 3	8.0± 0.4	0.53	1.33	1.47							
804-080060-150	150 см	60± 4	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73							
804-080080-150	150 см	80± 5	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73							
804-080100-150	150 см	100± 6	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73							
804-080150-150	150 см	150± 8	8.0± 0.4	0.53	1.48	1.73							

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,018 дюйма (0.46 мм)

Таблица 7.9.3 – Технические характеристики катетера баллонного дилатационного периферического в вариантах исполнения Hermes NC

РТА

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
820-030020-040	40 см	20± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-030030-040	40 см	30± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70
820-040020-040	40 см	20± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70	820-040030-040	40 см	30± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-050020-040	40 см	20± 2	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73	820-050030-040	40 см	30± 2	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73
820-060020-040	40 см	20± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73	820-060030-040	40 см	30± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-070020-040	40 см	20± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-070030-040	40 см	30± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73
820-080020-040	40 см	20± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73	820-080030-040	40 см	30± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-030040-040	40 см	40± 3	3.0± 0.15	0.96	1.73	1.73	820-030060-040	40 см	60± 4	3.0± 0.15	0.96	1.73	1.73
820-040040-040	40 см	40± 3	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73	820-040060-040	40 см	60± 4	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73
820-050040-040	40 см	40± 3	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73	820-050060-040	40 см	60± 4	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73
820-060040-040	40 см	40± 3	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73	820-060060-040	40 см	60± 4	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-070040-040	40 см	40± 3	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-070060-040	40 см	60± 4	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73
820-080040-040	40 см	40± 3	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73	820-080060-040	40 см	60± 4	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-030020-070	70 см	20± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040020-070	70 см	20± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030030-070	70 см	30± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040030-070	70 см	30± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030040-070	70 см	40± 3	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040040-070	70 см	40± 3	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030060-070	70 см	60± 4	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040060-070	70 см	60± 4	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030080-070	70 см	80± 5	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040080-070	70 см	80± 5	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030100-070	70 см	100± 6	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040100-070	70 см	100± 6	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030150-070	70 см	150± 8	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040150-070	70 см	150± 8	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
820-050020-070	70 см	20± 2	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060020-070	70 см	20± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050030-070	70 см	30± 2	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060030-070	70 см	30± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050040-070	70 см	40± 3	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060040-070	70 см	40± 3	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050060-070	70 см	60± 4	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060060-070	70 см	60± 4	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050080-070	70 см	80± 5	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060080-070	70 см	80± 5	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050100-070	70 см	100± 6	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060100-070	70 см	100± 6	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050150-070	70 см	150± 8	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060150-070	70 см	150± 8	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-070020-070	70 см	20± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080020-070	70 см	20± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070030-070	70 см	30± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080030-070	70 см	30± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070040-070	70 см	40± 3	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080040-070	70 см	40± 3	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070060-070	70 см	60± 4	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080060-070	70 см	60± 4	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070080-070	70 см	80± 5	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080080-070	70 см	80± 5	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070100-070	70 см	100± 6	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080100-070	70 см	100± 6	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070150-070	70 см	150± 8	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080150-070	70 см	150± 8	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-090020-070	70 см	20± 2	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100020-070	70 см	20± 2	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090030-070	70 см	30± 2	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100030-070	70 см	30± 2	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090040-070	70 см	40± 3	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100040-070	70 см	40± 3	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090060-070	70 см	60± 4	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100060-070	70 см	60± 4	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090080-070	70 см	80± 5	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100080-070	70 см	80± 5	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090100-070	70 см	100± 6	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100100-070	70 см	100± 6	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090150-070	70 см	150± 8	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100150-070	70 см	150± 8	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-030020-090	90 см	20± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040020-090	90 см	20± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030030-090	90 см	30± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040030-090	90 см	30± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр шфта (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр шфта (мм), c (± 0.05 мм)
820-030040-090	90 см	40± 3	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040040-090	90 см	40± 3	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030060-090	90 см	60± 4	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040060-090	90 см	60± 4	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030080-090	90 см	80± 5	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040080-090	90 см	80± 5	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030100-090	90 см	100± 6	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040100-090	90 см	100± 6	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030150-090	90 см	150± 8	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040150-090	90 см	150± 8	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73
820-050020-090	90 см	20± 2	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060020-090	90 см	20± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050030-090	90 см	30± 2	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060030-090	90 см	30± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050040-090	90 см	40± 3	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060040-090	90 см	40± 3	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050060-090	90 см	60± 4	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060060-090	90 см	60± 4	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050080-090	90 см	80± 5	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060080-090	90 см	80± 5	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050100-090	90 см	100± 6	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060100-090	90 см	100± 6	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050150-090	90 см	150± 8	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060150-090	90 см	150± 8	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-070020-090	90 см	20± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080020-090	90 см	20± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070030-090	90 см	30± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080030-090	90 см	30± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070040-090	90 см	40± 3	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080040-090	90 см	40± 3	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070060-090	90 см	60± 4	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080060-090	90 см	60± 4	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070080-090	90 см	80± 5	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080080-090	90 см	80± 5	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070100-090	90 см	100± 6	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080100-090	90 см	100± 6	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070150-090	90 см	150± 8	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080150-090	90 см	150± 8	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-090020-090	90 см	20± 2	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100020-090	90 см	20± 2	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090030-090	90 см	30± 2	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100030-090	90 см	30± 2	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090040-090	90 см	40± 3	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100040-090	90 см	40± 3	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090060-090	90 см	60± 4	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100060-090	90 см	60± 4	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
820-090080-090	90 см	80± 5	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100080-090	90 см	80± 5	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090100-090	90 см	100± 6	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100100-090	90 см	100± 6	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090150-090	90 см	150± 8	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100150-090	90 см	150± 8	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-030020-150	150 см	20± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040020-150	150 см	20± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030030-150	150 см	30± 2	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040030-150	150 см	30± 2	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030040-150	150 см	40± 3	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040040-150	150 см	40± 3	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030060-150	150 см	60± 4	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040060-150	150 см	60± 4	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030080-150	150 см	80± 5	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040080-150	150 см	80± 5	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030100-150	150 см	100± 6	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040100-150	150 см	100± 6	4.0± 0.2	0.96	1.70	1.70
820-030150-150	150 см	150± 8	3.0± 0.15	0.96	1.70	1.70	820-040150-150	150 см	150± 8	4.0± 0.2	0.96	1.73	1.73
820-050020-150	150 см	20± 2	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060020-150	150 см	20± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050030-150	150 см	30± 2	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060030-150	150 см	30± 2	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050040-150	150 см	40± 3	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060040-150	150 см	40± 3	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050060-150	150 см	60± 4	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060060-150	150 см	60± 4	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050080-150	150 см	80± 5	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060080-150	150 см	80± 5	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050100-150	150 см	100± 6	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060100-150	150 см	100± 6	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-050150-150	150 см	150± 8	5.0± 0.25	0.96	1.73	1.73	820-060150-150	150 см	150± 8	6.0± 0.3	0.96	1.73	1.73
820-070020-150	150 см	20± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080020-150	150 см	20± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070030-150	150 см	30± 2	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080030-150	150 см	30± 2	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070040-150	150 см	40± 3	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080040-150	150 см	40± 3	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070060-150	150 см	60± 4	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080060-150	150 см	60± 4	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070080-150	150 см	80± 5	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080080-150	150 см	80± 5	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-070100-150	150 см	100± 6	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080100-150	150 см	100± 6	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73

Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)	Ном. по каталогу	Эффективная длина катетера, L (± 3 см)	Эффективная длина баллона (мм), a	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Внутренний диаметр (мм) ± 0.02 мм	Дистальный наружный диаметр shaft (мм), d (± 0.05 мм)	Проксимальный наружный диаметр shaft (мм), c (± 0.05 мм)
820-070150-150	150 см	150± 8	7.0± 0.35	0.96	1.73	1.73	820-080150-150	150 см	150± 8	8.0± 0.4	0.96	1.73	1.73
820-090020-150	150 см	20± 2	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100020-150	150 см	20± 2	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090030-150	150 см	30± 2	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100030-150	150 см	30± 2	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090040-150	150 см	40± 3	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100040-150	150 см	40± 3	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090060-150	150 см	60± 4	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100060-150	150 см	60± 4	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090080-150	150 см	80± 5	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100080-150	150 см	80± 5	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090100-150	150 см	100± 6	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100100-150	150 см	100± 6	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93
820-090150-150	150 см	150± 8	9.0± 0.45	0.96	1.93	1.93	820-100150-150	150 см	150± 8	10.0 ± 0.5	0.96	1.93	1.93

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,035 дюйма (0.89 мм)

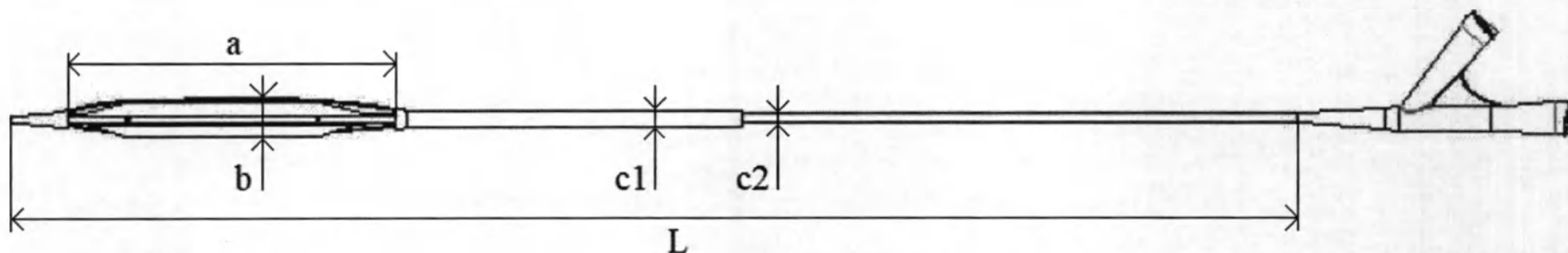


Рисунок 7.4 Катетер баллонный дилатационный периферический в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring. Обозначение размеров

Таблица 7.10 – Технические характеристики катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Tri-Wedge

PTA Scoring

Ном. по каталогу	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Эффективная длина баллона, a	Внутренний диаметр кончика (мм)	Ширина разрезающей кромки (мм) ± 0.0203	Эффективная длина катетера (мм), L	Наружный диаметр дистального shaft (мм), c1	Наружный диаметр дистального shaft (мм), c2
21-18S32	3 ± 0.15	20 ± 2 мм	0.4953 $\pm$ 0.0127	0.1905	500 $\pm$ 30	1.32 $\pm$ 0.10	1.14 $\pm$ 0.10
21-18S33	3 ± 0.15	30 ± 2 мм					
21-18S34	3 ± 0.15	40 ± 3 мм					
21-18S36	3 ± 0.15	60 ± 4 мм					
21-18S42	4 ± 0.20	20 ± 2 мм					
21-18S43	4 ± 0.20	30 ± 2 мм					
21-18S44	4 ± 0.20	40 ± 3 мм					
21-18S46	4 ± 0.20	60 ± 4 мм					
21-18S52	5 ± 0.25	20 ± 2 мм					
21-18S53	5 ± 0.25	30 ± 2 мм					
21-18S54	5 ± 0.25	40 ± 3 мм					
21-18S56	5 ± 0.25	60 ± 4 мм					
21-18S62	6 ± 0.30	20 ± 2 мм					
21-18S63	6 ± 0.30	30 ± 2 мм					
21-18S64	6 ± 0.30	40 ± 3 мм					
21-18S66	6 ± 0.30	60 ± 4 мм					
21-18S72	7 ± 0.35	20 ± 2 мм				1.65 $\pm$ 0.10	1.47 $\pm$ 0.10
21-18S73	7 ± 0.35	30 ± 2 мм					
21-18S74	7 ± 0.35	40 ± 3 мм					
21-18S76	7 ± 0.35	60 ± 4 мм					

21-18S82	8±0.40	20± 2MM							
21-18S83	8±0.40	30± 2MM							
21-18S84	8±0.40	40± 3MM							
21-18S86	8±0.40	60± 4MM							
21-18L32	3±0.15	20± 2MM			750 ± 30	1.32 ± 0.10	1.14 ± 0.10		
21-18L33	3±0.15	30± 2MM							
21-18L34	3±0.15	40± 3MM							
21-18L36	3±0.15	60± 4MM							
21-18L42	4±0.20	20± 2MM							
21-18L43	4±0.20	30± 2MM							
21-18L44	4±0.20	40± 3MM							
21-18L46	4±0.20	60± 4MM							
21-18L52	5±0.25	20± 2MM							
21-18L53	5±0.25	30± 2MM							
21-18L54	5±0.25	40± 3MM							
21-18L56	5±0.25	60± 4MM							
21-18L62	6±0.30	20± 2MM							
21-18L63	6±0.30	30± 2MM							
21-18L64	6±0.30	40± 3MM							
21-18L66	6±0.30	60± 4MM							
21-18L72	7±0.35	20± 2MM						1.65 ± 0.10	1.47±0.10
21-18L73	7±0.35	30± 2MM							
21-18L74	7±0.35	40± 3MM							
21-18L76	7±0.35	60± 4MM							
21-18L82	8±0.40	20± 2MM							
21-18L83	8±0.40	30± 2MM							

21-18L84	8±0.40	40± 3MM	0.9271 ± 0.0127		500 ± 30	1.91 ± 0.10	1.70 ± 0.10
21-18L86	8±0.40	60± 4MM					
21-35S32	3±0.15	20± 2MM					
21-35S33	3±0.15	30± 2MM					
21-35S34	3±0.15	40± 3MM					
21-35S36	3±0.15	60± 4MM					
21-35S42	4±0.20	20± 2MM					
21-35S43	4±0.20	30± 2MM					
21-35S44	4±0.20	40± 3MM					
21-35S46	4±0.20	60± 4MM					
21-35S52	5±0.25	20± 2MM					
21-35S53	5±0.25	30± 2MM					
21-35S54	5±0.25	40± 3MM					
21-35S56	5±0.25	60± 4MM					
21-35S62	6±0.30	20± 2MM					
21-35S63	6±0.30	30± 2MM					
21-35S64	6±0.30	40± 3MM					
21-35S66	6±0.30	60± 4MM					
21-35S72	7±0.35	20± 2MM				2.03 ± 0.10	1.78 ± 0.10
21-35S73	7±0.35	30± 2MM					
21-35S74	7±0.35	40± 3MM					
21-35S76	7±0.35	60± 4MM					
21-35S82	8±0.40	20± 2MM					
21-35S83	8±0.40	30± 2MM					
21-35S84	8±0.40	40± 3MM					
21-35S86	8±0.40	60± 4MM					

21-35L32	3±0.15	20± 2mm			750 ± 30	1.91 ± 0.10	1.70 ± 0.10
21-35L33	3±0.15	30± 2mm					
21-35L34	3±0.15	40± 3mm					
21-35L36	3±0.15	60± 4mm					
21-35L42	4±0.20	20± 2mm					
21-35L43	4±0.20	30± 2mm					
21-35L44	4±0.20	40± 3mm					
21-35L46	4±0.20	60± 4mm					
21-35L52	5±0.25	20± 2mm					
21-35L53	5±0.25	30± 2mm					
21-35L54	5±0.25	40± 3mm					
21-35L56	5±0.25	60± 4mm					
21-35L62	6±0.30	20± 2mm					
21-35L63	6±0.30	30± 2mm					
21-35L64	6±0.30	40± 3mm					
21-35L66	6±0.30	60± 4mm					
21-35L72	7±0.35	20± 2mm				2.03 ± 0.10	1.78 ± 0.10
21-35L73	7±0.35	30± 2mm					
21-35L74	7±0.35	40± 3mm					
21-35L76	7±0.35	60± 4mm					
21-35L82	8±0.40	20± 2mm					
21-35L83	8±0.40	30± 2mm					
21-35L84	8±0.40	40± 3mm					
21-35L86	8±0.40	60± 4mm					

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,018 дюйма (0.46 мм) для номеров по каталогу начинающихся с 21-18...

Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером: 0,035 дюйма (0.89 мм) для номеров по каталогу начинающихся с 21-35...



Таблица 7.14 – Зависимость номинального диаметра баллона от давления катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Polux SC PTA

Давление, атм. (кПа)	Номинальный диаметр баллона, мм $\pm 10\%$									
	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
2 (200)	1.39	1.86	2.34	2.82	3.30	3.78	4.24	4.70	5.17	5.62
4 (400)	1.45	1.93	2.42	2.91	3.40	3.89	4.37	4.85	5.33	5.81
6 (600) (Давление наполнения баллона)	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00
8 (800)	1.56	2.07	2.57	3.10	3.60	4.11	4.62	5.15	5.66	6.20
10 (1000)	1.62	2.14	2.65	3.19	3.70	4.22	4.75	5.30	5.83	6.39
12 (1200)	1.67	2.21	2.73	3.28	3.80	4.34	4.88	5.45	5.99	6.58
14 (1400) (Максимально допустимое давление в баллоне)	1.73	2.28	2.80	3.38	3.91	4.45	5.01	5.60	6.16	6.77
16 (1600)	1.78	2.34	2.88	3.47	4.01	4.56	5.14	5.75	6.32	6.97
18 (1800)	1.84	2.41	2.96	3.56	4.11	4.67	5.26	5.90	6.49	7.16

Таблица 7.15 – Зависимость номинального диаметра баллона от давления катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Minerva SC PTA

Давление, атм. (кПа)	Номинальный диаметр баллона, мм $\pm 10\%$													
	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
2 (200)	1.40	1.87	2.36	2.82	3.30	3.78	4.25	4.71	5.18	5.63	6.58	7.56	8.50	9.38
4 (400)	1.45	1.94	2.45	2.91	3.40	3.90	4.38	4.86	5.32	5.81	6.79	7.78	8.75	9.69
6 (600) (Давление наполнения баллона)	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	7.00	8.00	9.00	10.0

8 (800)	1.55	2.05	2.57	3.10	3.63	4.13	4.63	5.15	5.66	6.19	7.21	8.23	9.25	10.31
10 (1000)	1.60	2.11	2.64	3.18	3.74	4.25	4.75	5.29	5.83	6.38	7.43	8.45	9.50	10.63
12 (1200)	1.65	2.19	2.71	3.27	3.85	4.35	4.88	5.43	5.98	6.56	7.63	8.67	9.75	10.94
14 (1400) (Максимально допустимое давление в баллоне)	1.70	2.25	2.80	3.35	3.95	4.45	5.00	5.58	6.15	6.75	7.85	8.90	10.0	11.25
16 (1600)	1.75	2.32	2.85	3.45	4.05	4.58	5.14	5.72	6.29	6.94	8.05	9.12	10.25	11.57
18 (1800)	1.80	2.38	2.93	3.55	4.15	4.68	5.25	5.87	6.48	7.13	8.28	9.35	10.50	11.88

Таблица 7.16 – Зависимость номинального диаметра баллона от давления катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Atropos SC PTA

Давление, атм. (кПа)	Номинальный диаметр баллона, мм $\pm 10\%$							
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
2 (200)	2.82	3.77	4.71	5.62	6.59	7.56	8.50	9.38
4 (400)	2.91	3.89	4.86	5.81	6.80	7.78	8.75	9.69
6 (600) (Давление наполнения баллона)	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.0
8 (800)	3.09	4.12	5.15	6.19	7.21	8.22	9.25	10.30
10 (1000)	3.17	4.23	5.30	6.37	7.41	8.44	9.50	10.61
12 (1200)	3.26	4.35	5.44	6.56	7.62	8.66	9.75	10.92
14 (1400) (Максимально допустимое давление в баллоне)	3.35	4.46	5.59	6.75	7.82	8.89	10.0	11.23
16 (1600)	3.44	4.58	5.74	6.94	8.03	9.11	10.25	11.54
18 (1800)	3.53	4.69	5.88	7.13	8.23	9.33	10.50	11.85

Таблица 7.17 – Зависимость номинального диаметра баллона от давления катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Castor NC PTA

	Номинальный диаметр баллона $\pm 5\%$										
Давление, атм. (кПа)	2.0мм	2.5мм	3.0мм	3.5мм	4.0мм	4.5мм	5.0мм	5.5мм	6.0мм	7.0мм	8.0мм
8 (800)	1.95	2.44	2.93	3.42	3.88	4.36	4.87	5.37	5.85	6.83	7.80
10 (1000)	1.98	2.47	2.97	3.46	3.94	4.43	4.94	5.44	5.93	6.92	7.90
12 (1200) (Давление наполнения баллона)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	7.00	8.00
14 (1400)	2.02	2.53	3.04	3.55	4.05	4.57	5.07	5.56	6.07	7.08	8.11
16 (1600)	2.05	2.56	3.07	3.59	4.11	4.64	5.14	5.63	6.15	7.17	8.21
18 (1800)	2.07	2.59	3.11	3.64	4.17	4.71	5.20	5.69	6.22	7.25	8.31
20 (2000)	2.09	2.62	3.14	3.68	4.23	4.78	5.27	5.76	6.29	7.34	8.41
22 (2200) (Максимально допустимое давление в баллоне)	2.12	2.65	3.18	3.72	4.28	4.85	5.34	5.82	6.37	7.42	8.51
24 (2400)	2.14	2.68	3.21	3.77	4.34	4.92	5.40	5.89	6.44	7.51	8.61
26 (2600)	2.17	2.71	3.25	3.81	4.40	4.99	5.47	5.95	6.52	7.59	8.71
28 (2800)	2.19	2.74	3.28	3.85	4.45	5.06	5.54	6.02	6.59	7.67	8.81

Таблица 7.18 – Зависимость номинального диаметра баллона от давления катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Achilles NC PTA

	Номинальный диаметр баллона $\pm 5\%$										
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Давление, атм. (кПа)	2.0 мм	2.5мм	3.0мм	3.5мм	4.0мм	4.5мм	5.0мм	5.5мм	6.0мм	7.0мм	8.0мм
8 (800)	1.95	2.44	2.93	3.41	3.88	4.36	4.86	5.37	5.86	6.84	7.81
10 (1000)	1.98	2.47	2.96	3.46	3.94	4.43	4.93	5.43	5.93	6.92	7.90
12 (1200) (Давление наполнения баллона)	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	7.00	8.00
14 (1400)	2.02	2.53	3.03	3.55	4.05	4.56	5.07	5.56	6.07	7.09	8.10
16 (1600)	2.05	2.56	3.07	3.59	4.11	4.63	5.14	5.63	6.14	7.17	8.20
18 (1800)	2.07	2.59	3.11	3.64	4.17	4.70	5.21	5.69	6.21	7.25	8.29
20 (2000)	2.09	2.62	3.14	3.68	4.22	4.77	5.28	5.76	6.28	7.34	8.39
22 (2200) (Максимально допустимое давление в баллоне)	2.12	2.65	3.18	3.73	4.28	4.83	5.35	5.83	6.35	7.42	8.49
24 (2400)	2.14	2.68	3.21	3.78	4.33	4.90	5.42	5.89	6.43	7.50	8.58
26 (2600)	2.17	2.71	3.25	3.82	4.39	4.97	5.49	5.96	6.50	7.59	8.68
28 (2800)	2.19	2.74	3.29	3.87	4.45	5.03	5.55	6.02	6.57	7.67	8.78

Таблица 7.19 – Зависимость номинального диаметра баллона от давления катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Hermes NC PTA

Давление, атм. (кПа)	Номинальный диаметр баллона $\pm 5\%$							
	3.0мм	4.0мм	5.0мм	6.0мм	7.0мм	8.0мм	9.0мм	10.0мм
8 (800)	2.93	3.89	4.86	5.86	6.82	7.80	8.81	9.82
10 (1000)	2.96	3.95	4.93	5.93	6.91	7.90	8.91	9.91
12 (1200) (Давление наполнения баллона)	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00

14 (1400)	3.03	4.06	5.07	6.08	7.08	8.10	9.10	10.09
16 (1600)	3.07	4.12	5.14	6.15	7.17	8.20	9.19	10.18
18 (1800) (Максимально допустимое давление в баллоне (7.0-10.0мм))	3.10	4.17	5.21	6.23	7.26	8.30	9.29	10.27
20 (2000) (Максимально допустимое давление в баллоне (5.0-6.0мм))	3.14	4.23	5.28	6.30	7.34	8.40	9.38	10.36
22 (2200) (Максимально допустимое давление в баллоне (3.0-4.0мм))	3.17	4.28	5.35	6.38	7.43	8.50	9.48	10.45
24 (2400)	3.21	4.34	5.42	6.45	7.52	8.60	9.57	10.54
26 (2600)	3.24	4.40	5.49	6.52	7.61	8.70	9.67	10.63
28 (2800)	3.28	4.45	5.56	6.60	7.69	8.80	9.76	10.72

Таблица 7.20 – Зависимость номинального диаметра баллона от давления катетера баллонного дилатационного периферического в варианте исполнения Tri-Wedge PTA Scoring

	Номинальный диаметр баллона $\pm 5\%$					
Давление, атм. (кПа)	3.0мм	4.0мм	5.0мм	6.0мм	7.0мм	8.0мм
8 (800)	2.83	3.77	4.74	5.65	6.58	7.48
10 (1000)	2.92	3.90	4.88	5.84	6.80	7.76
12 (1200) (Давление наполнения баллона)	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
14 (1400)	3.05	4.07	5.10	6.11	7.10	8.15
16 (1600) (Максимально допустимое давление в баллоне (7.0-8.0мм))	3.10	4.14	5.18	6.21	7.22	8.29
18 (1800)	3.14	4.20	5.25	6.30		
20 (2000) (Максимально допустимое давление в баллоне 3.0-6.0мм))	3.18	4.27	5.33	6.39		

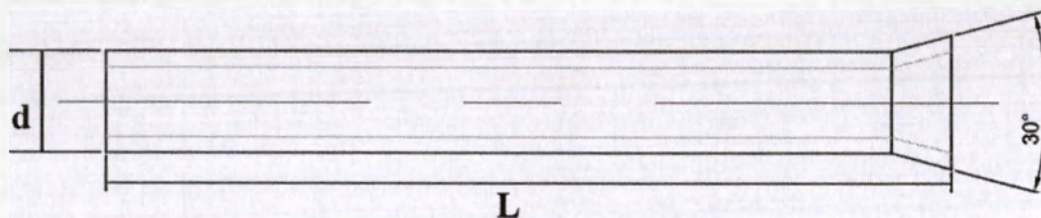


Рисунок 7.5 Инструмент для повторного сворачивания. Обозначение размеров



Рисунок 7.6 Инструмент для повторного сворачивания

Таблица 7.21.1 Характеристики инструмента для повторного сворачивания катетера баллонного дилатационного Tri-Wedge PTA Scoring

Ном. по каталогу	Номинальный диаметр баллона (мм), b	Эффективная длина баллона, a	Длина (мм), ± 5 мм	Внутренний диаметр (мм), ± 0.03 мм	Внешний диаметр (мм), ± 0.06 мм
21-18S32	3 ± 0.15	20 ± 2 мм	60	1,5	2,01
21-18S33	3 ± 0.15	30 ± 2 мм	60	1,5	2,01
21-18S34	3 ± 0.15	40 ± 3 мм	60	1,5	2,01
21-18S36	3 ± 0.15	60 ± 4 мм	60	1,5	2,01
21-18S42	4 ± 0.20	20 ± 2 мм	60	1,68	2,19
21-18S43	4 ± 0.20	30 ± 2 мм	60	1,68	2,19
21-18S44	4 ± 0.20	40 ± 3 мм	60	1,68	2,19
21-18S46	4 ± 0.20	60 ± 4 мм	60	1,68	2,19
21-18S52	5 ± 0.25	20 ± 2 мм	60	1,68	2,19
21-18S53	5 ± 0.25	30 ± 2 мм	60	1,68	2,19
21-18S54	5 ± 0.25	40 ± 3 мм	60	1,68	2,19
21-18S56	5 ± 0.25	60 ± 4 мм	60	1,68	2,19
21-18S62	6 ± 0.30	20 ± 2 мм	60	1,86	2,37
21-18S63	6 ± 0.30	30 ± 2 мм	60	1,86	2,37
21-18S64	6 ± 0.30	40 ± 3 мм	60	1,86	2,37
21-18S66	6 ± 0.30	60 ± 4 мм	60	1,86	2,37
21-18S72	7 ± 0.35	20 ± 2 мм	60	1,94	2,44
21-18S73	7 ± 0.35	30 ± 2 мм	60	1,94	2,44

21-18S74	7±0.35	40± 3mm	60	1,94	2,44
21-18S76	7±0.35	60± 4mm	60	1,94	2,44
21-18S82	8±0.40	20± 2mm	60	2,16	2,67
21-18S83	8±0.40	30± 2mm	60	2,16	2,67
21-18S84	8±0.40	40± 3mm	60	2,16	2,67
21-18S86	8±0.40	60± 4mm	60	2,16	2,67
21-18L32	3±0.15	20± 2mm	60	1,5	2,01
21-18L33	3±0.15	30± 2mm	60	1,5	2,01
21-18L34	3±0.15	40± 3mm	60	1,5	2,01
21-18L36	3±0.15	60± 4mm	60	1,5	2,01
21-18L42	4±0.20	20± 2mm	60	1,68	2,19
21-18L43	4±0.20	30± 2mm	60	1,68	2,19
21-18L44	4±0.20	40± 3mm	60	1,68	2,19
21-18L46	4±0.20	60± 4mm	60	1,68	2,19
21-18L52	5±0.25	20± 2mm	60	1,68	2,19
21-18L53	5±0.25	30± 2mm	60	1,68	2,19
21-18L54	5±0.25	40± 3mm	60	1,68	2,19
21-18L56	5±0.25	60± 4mm	60	1,68	2,19
21-18L62	6±0.30	20± 2mm	60	1,86	2,37
21-18L63	6±0.30	30± 2mm	60	1,86	2,37
21-18L64	6±0.30	40± 3mm	60	1,86	2,37
21-18L66	6±0.30	60± 4mm	60	1,86	2,37
21-18L72	7±0.35	20± 2mm	60	1,94	2,44
21-18L73	7±0.35	30± 2mm	60	1,94	2,44
21-18L74	7±0.35	40± 3mm	60	1,94	2,44
21-18L76	7±0.35	60± 4mm	60	1,94	2,44
21-18L82	8±0.40	20± 2mm	60	2,16	2,67
21-18L83	8±0.40	30± 2mm	60	2,16	2,67
21-18L84	8±0.40	40± 3mm	60	2,16	2,67
21-18L86	8±0.40	60± 4mm	60	2,16	2,67
21-35S32	3±0.15	20± 2mm	60	1,76	2,27
21-35S33	3±0.15	30± 2mm	60	1,76	2,27
21-35S34	3±0.15	40± 3mm	60	1,76	2,27
21-35S36	3±0.15	60± 4mm	60	1,76	2,27
21-35S42	4±0.20	20± 2mm	60	1,76	2,27
21-35S43	4±0.20	30± 2mm	60	1,76	2,27
21-35S44	4±0.20	40± 3mm	60	1,76	2,27
21-35S46	4±0.20	60± 4mm	60	1,76	2,27
21-35S52	5±0.25	20± 2mm	60	2,06	2,57
21-35S53	5±0.25	30± 2mm	60	2,06	2,57
21-35S54	5±0.25	40± 3mm	60	2,06	2,57
21-35S56	5±0.25	60± 4mm	60	2,06	2,57

21-35S62	6±0.30	20± 2mm	60	2,16	2,67
21-35S63	6±0.30	30± 2mm	60	2,16	2,67
21-35S64	6±0.30	40± 3mm	60	2,16	2,67
21-35S66	6±0.30	60± 4mm	60	2,16	2,67
21-35S72	7±0.35	20± 2mm	60	2,27	2,77
21-35S73	7±0.35	30± 2mm	60	2,27	2,77
21-35S74	7±0.35	40± 3mm	60	2,27	2,77
21-35S76	7±0.35	60± 4mm	60	2,27	2,77
21-35S82	8±0.40	20± 2mm	60	2,27	2,77
21-35S83	8±0.40	30± 2mm	60	2,27	2,77
21-35S84	8±0.40	40± 3mm	60	2,27	2,77
21-35S86	8±0.40	60± 4mm	60	2,27	2,77
21-35L32	3±0.15	20± 2mm	60	1,76	2,27
21-35L33	3±0.15	30± 2mm	60	1,76	2,27
21-35L34	3±0.15	40± 3mm	60	1,76	2,27
21-35L36	3±0.15	60± 4mm	60	1,76	2,27
21-35L42	4±0.20	20± 2mm	60	1,76	2,27
21-35L43	4±0.20	30± 2mm	60	1,76	2,27
21-35L44	4±0.20	40± 3mm	60	1,76	2,27
21-35L46	4±0.20	60± 4mm	60	1,76	2,27
21-35L52	5±0.25	20± 2mm	60	2,06	2,57
21-35L53	5±0.25	30± 2mm	60	2,06	2,57
21-35L54	5±0.25	40± 3mm	60	2,06	2,57
21-35L56	5±0.25	60± 4mm	60	2,06	2,57
21-35L62	6±0.30	20± 2mm	60	2,16	2,67
21-35L63	6±0.30	30± 2mm	60	2,16	2,67
21-35L64	6±0.30	40± 3mm	60	2,16	2,67
21-35L66	6±0.30	60± 4mm	60	2,16	2,67
21-35L72	7±0.35	20± 2mm	60	2,27	2,77
21-35L73	7±0.35	30± 2mm	60	2,27	2,77
21-35L74	7±0.35	40± 3mm	60	2,27	2,77
21-35L76	7±0.35	60± 4mm	60	2,27	2,77
21-35L82	8±0.40	20± 2mm	60	2,27	2,77
21-35L83	8±0.40	30± 2mm	60	2,27	2,77
21-35L84	8±0.40	40± 3mm	60	2,27	2,77
21-35L86	8±0.40	60± 4mm	60	2,27	2,77

Таблица 7.21.2 Характеристики инструмента для повторного сворачивания катетера баллонного дилатационного Polux SC PTA

Размер баллона	Длина (мм), ± 5 мм	Внутренний диаметр (мм), ± 0.03 мм	Внешний диаметр (мм), ± 0.06 мм
1.50x5	60	1.12	1.63

1.50x10	60	1.12	1.63
1.50x15	60	1.12	1.63
1.50x20	60	1.12	1.63
1.50x30	60	1.12	1.63
1.50x40	60	1.12	1.63
1.50x60	100	1.12	1.63
1.50x80	100	1.12	1.63
1.50x100	100	1.12	1.63
1.50x120	100	1.12	1.63
1.50x150	100	1.12	1.63
1.50x200	100	1.12	1.63
2.00x5	60	1.12	1.63
2.00x10	60	1.12	1.63
2.00x15	60	1.12	1.63
2.00x20	60	1.12	1.63
2.00x30	60	1.12	1.63
2.00x40	60	1.12	1.63
2.00x60	100	1.12	1.63
2.00x80	100	1.12	1.63
2.00x100	100	1.12	1.63
2.00x120	100	1.12	1.63
2.00x150	100	1.12	1.63
2.00x200	100	1.12	1.63
2.50x5	60	1.27	1.78
2.50x10	60	1.27	1.78
2.50x15	60	1.27	1.78
2.50x20	60	1.27	1.78
2.50x30	60	1.27	1.78
2.50x40	60	1.27	1.78
2.50x60	100	1.27	1.78
2.50x80	100	1.27	1.78
2.50x100	100	1.27	1.78
2.50x120	100	1.27	1.78
2.50x150	100	1.27	1.78
2.50x200	100	1.27	1.78
3.00x5	60	1.27	1.78
3.00x10	60	1.27	1.78
3.00x15	60	1.27	1.78
3.00x20	60	1.27	1.78
3.00x30	60	1.27	1.78
3.00x40	60	1.27	1.78
3.00x60	100	1.27	1.78

3.00x80	100	1.27	1.78
3.00x100	100	1.27	1.78
3.00x120	100	1.27	1.78
3.00x150	100	1.27	1.78
3.00x200	100	1.27	1.78
3.50x5	60	1.5	2.01
3.50x10	60	1.5	2.01
3.50x15	60	1.5	2.01
3.50x20	60	1.5	2.01
3.50x30	60	1.5	2.01
3.50x40	60	1.5	2.01
3.50x60	100	1.5	2.01
3.50x80	100	1.5	2.01
3.50x100	100	1.5	2.01
3.50x120	100	1.5	2.01
3.50x150	100	1.5	2.01
3.50x200	100	1.5	2.01
4.00x5	60	1.5	2.01
4.00x10	60	1.5	2.01
4.00x15	60	1.5	2.01
4.00x20	60	1.5	2.01
4.00x30	60	1.5	2.01
4.00x40	60	1.5	2.01
4.00x60	100	1.5	2.01
4.00x80	100	1.5	2.01
4.00x100	100	1.5	2.01
4.00x120	100	1.5	2.01
4.00x150	100	1.5	2.01
4.00x200	100	1.5	2.01
4.50x5	60	1.5	2.01
4.50x10	60	1.5	2.01
4.50x15	60	1.5	2.01
4.50x20	60	1.5	2.01
4.50x30	60	1.5	2.01
4.50x40	60	1.5	2.01
4.50x60	100	1.5	2.01
4.50x80	100	1.5	2.01
4.50x100	100	1.5	2.01
4.50x120	100	1.5	2.01
4.50x150	100	1.5	2.01
4.50x200	100	1.5	2.01
5.00x5	60	1.68	2.19

5.00x10	60	1.68	2.19
5.00x15	60	1.68	2.19
5.00x20	60	1.68	2.19
5.00x30	60	1.68	2.19
5.00x40	60	1.68	2.19
5.00x60	100	1.68	2.19
5.00x80	100	1.68	2.19
5.00x100	100	1.68	2.19
5.00x120	100	1.68	2.19
5.00x150	100	1.68	2.19
5.00x200	100	1.68	2.19
5.50x5	60	1.68	2.19
5.50x10	60	1.68	2.19
5.50x15	60	1.68	2.19
5.50x20	60	1.68	2.19
5.50x30	60	1.68	2.19
5.50x40	60	1.68	2.19
5.50x60	100	1.68	2.19
5.50x80	100	1.68	2.19
5.50x100	100	1.68	2.19
5.50x120	100	1.68	2.19
5.50x150	100	1.68	2.19
5.50x200	100	1.68	2.19
6.00x5	60	1.76	2.27
6.00x10	60	1.76	2.27
6.00x15	60	1.76	2.27
6.00x20	60	1.76	2.27
6.00x30	60	1.76	2.27
6.00x40	60	1.76	2.27
6.00x60	100	1.76	2.27
6.00x80	100	1.76	2.27
6.00x100	100	1.76	2.27
6.00x120	100	1.76	2.27
6.00x150	100	1.76	2.27
6.00x200	100	1.76	2.27

Таблица 7.21.3 Характеристики инструмента для повторного сворачивания катетера баллонного дилатационного Minerva SC PTA

Размер баллона	Длина (мм), ± 5 мм	Внутренний диаметр (мм), ± 0.03 мм	Внешний диаметр (мм), ± 0.06 мм
1.50x5	60	1.12	1.63
1.50x10	60	1.12	1.63
1.50x15	60	1.12	1.63

1.50x20	60	1.12	1.63
1.50x30	60	1.12	1.63
1.50x40	60	1.12	1.63
1.50x60	100	1.12	1.63
1.50x80	100	1.12	1.63
1.50x100	100	1.12	1.63
1.50x120	100	1.12	1.63
1.50x150	100	1.12	1.63
1.50x200	100	1.12	1.63
2.00x5	60	1.12	1.63
2.00x10	60	1.12	1.63
2.00x15	60	1.12	1.63
2.00x20	60	1.12	1.63
2.00x30	60	1.12	1.63
2.00x40	60	1.12	1.63
2.00x60	100	1.12	1.63
2.00x80	100	1.12	1.63
2.00x100	100	1.12	1.63
2.00x120	100	1.12	1.63
2.00x150	100	1.12	1.63
2.00x200	100	1.12	1.63
2.50x5	60	1.27	1.78
2.50x10	60	1.27	1.78
2.50x15	60	1.27	1.78
2.50x20	60	1.27	1.78
2.50x30	60	1.27	1.78
2.50x40	60	1.27	1.78
2.50x60	100	1.27	1.78
2.50x80	100	1.27	1.78
2.50x100	100	1.27	1.78
2.50x120	100	1.27	1.78
2.50x150	100	1.27	1.78
2.50x200	100	1.27	1.78
3.00x5	60	1.27	1.78
3.00x10	60	1.27	1.78
3.00x15	60	1.27	1.78
3.00x20	60	1.27	1.78
3.00x30	60	1.27	1.78
3.00x40	60	1.27	1.78
3.00x60	100	1.27	1.78
3.00x80	100	1.27	1.78
3.00x100	100	1.27	1.78
3.00x120	100	1.27	1.78
3.00x150	100	1.27	1.78
3.00x200	100	1.27	1.78

3.50x5	60	1.5	2.01
3.50x10	60	1.5	2.01
3.50x15	60	1.5	2.01
3.50x20	60	1.5	2.01
3.50x30	60	1.5	2.01
3.50x40	60	1.5	2.01
3.50x60	100	1.5	2.01
3.50x80	100	1.5	2.01
3.50x100	100	1.5	2.01
3.50x120	100	1.5	2.01
3.50x150	100	1.5	2.01
3.50x200	100	1.5	2.01
4.00x5	60	1.5	2.01
4.00x10	60	1.5	2.01
4.00x15	60	1.5	2.01
4.00x20	60	1.5	2.01
4.00x30	60	1.5	2.01
4.00x40	60	1.5	2.01
4.00x60	100	1.5	2.01
4.00x80	100	1.5	2.01
4.00x100	100	1.5	2.01
4.00x120	100	1.5	2.01
4.00x150	100	1.5	2.01
4.00x200	100	1.5	2.01
4.50x5	60	1.5	2.01
4.50x10	60	1.5	2.01
4.50x15	60	1.5	2.01
4.50x20	60	1.5	2.01
4.50x30	60	1.5	2.01
4.50x40	60	1.5	2.01
4.50x60	100	1.5	2.01
4.50x80	100	1.5	2.01
4.50x100	100	1.5	2.01
4.50x120	100	1.5	2.01
4.50x150	100	1.5	2.01
4.50x200	100	1.5	2.01
5.00x5	60	1.68	2.19
5.00x10	60	1.68	2.19
5.00x15	60	1.68	2.19
5.00x20	60	1.68	2.19
5.00x30	60	1.68	2.19
5.00x40	60	1.68	2.19
5.00x60	100	1.68	2.19
5.00x80	100	1.68	2.19
5.00x100	100	1.68	2.19

5.00x120	100	1.68	2.19
5.00x150	100	1.68	2.19
5.00x200	100	1.68	2.19
5.50x5	60	1.68	2.19
5.50x10	60	1.68	2.19
5.50x15	60	1.68	2.19
5.50x20	60	1.68	2.19
5.50x30	60	1.68	2.19
5.50x40	60	1.68	2.19
5.50x60	100	1.68	2.19
5.50x80	100	1.68	2.19
5.50x100	100	1.68	2.19
5.50x120	100	1.68	2.19
5.50x150	100	1.68	2.19
5.50x200	100	1.68	2.19
6.00x5	60	1.76	2.27
6.00x10	60	1.76	2.27
6.00x15	60	1.76	2.27
6.00x20	60	1.76	2.27
6.00x30	60	1.76	2.27
6.00x40	60	1.76	2.27
6.00x60	100	1.76	2.27
6.00x80	100	1.76	2.27
6.00x100	100	1.76	2.27
6.00x120	100	1.76	2.27
6.00x150	100	1.76	2.27
6.00x200	100	1.76	2.27
7.00x5	60	1.94	2.44
7.00x10	60	1.94	2.44
7.00x15	60	1.94	2.44
7.00x20	60	1.94	2.44
7.00x30	60	1.94	2.44
7.00x40	60	1.94	2.44
7.00x60	100	1.94	2.44
7.00x80	100	1.94	2.44
7.00x100	100	1.94	2.44
7.00x120	100	1.94	2.44
7.00x150	100	1.94	2.44
7.00x200	100	1.94	2.44
8.00x5	60	2.27	2.77
8.00x10	60	2.27	2.77
8.00x15	60	2.27	2.77
8.00x20	60	2.27	2.77
8.00x30	60	2.27	2.77
8.00x40	60	2.27	2.77

8.00x60	100	2.27	2.77
8.00x80	100	2.27	2.77
8.00x100	100	2.27	2.77
8.00x120	100	2.27	2.77
8.00x150	100	2.27	2.77
8.00x200	100	2.27	2.77
9.00x5	60	2.27	2.77
9.00x10	60	2.27	2.77
9.00x15	60	2.27	2.77
9.00x20	60	2.27	2.77
9.00x30	60	2.27	2.77
9.00x40	60	2.27	2.77
9.00x60	100	2.27	2.77
9.00x80	100	2.27	2.77
9.00x100	100	2.27	2.77
9.00x120	100	2.27	2.77
9.00x150	100	2.27	2.77
9.00x200	100	2.27	2.77
10.00x5	60	2.27	2.77
10.00x10	60	2.27	2.77
10.00x15	60	2.27	2.77
10.00x20	60	2.27	2.77
10.00x30	60	2.27	2.77
10.00x40	60	2.27	2.77
10.00x60	100	2.27	2.77
10.00x80	100	2.27	2.77
10.00x100	100	2.27	2.77
10.00x120	100	2.27	2.77
10.00x150	100	2.27	2.77
10.00x200	100	2.27	2.77

Таблица 7.21.4 Характеристики инструмента для повторного сворачивания катетера баллонного дилатационного Atropos SC PTA

Размер баллона	Длина (мм), ± 5 мм	Внутренний диаметр (мм), ± 0.03 мм	Внешний диаметр (мм), ± 0.06 мм
3.00x20	60	1.68	2.19
3.00x30	60	1.68	2.19
3.00x40	60	1.68	2.19
3.00x60	100	1.68	2.19
3.00x80	100	1.68	2.19
3.00x100	100	1.68	2.19
3.00x120	100	1.68	2.19
3.00x150	100	1.68	2.19
3.00x200	100	1.68	2.19
4.00x20	60	1.76	2.27

4.00x30	60	1.76	2.27
4.00x40	60	1.76	2.27
4.00x60	100	1.76	2.27
4.00x80	100	1.76	2.27
4.00x100	100	1.76	2.27
4.00x120	100	1.76	2.27
4.00x150	100	1.76	2.27
4.00x200	100	1.76	2.27
5.00x20	60	1.86	2.37
5.00x30	60	1.86	2.37
5.00x40	60	1.86	2.37
5.00x60	100	1.86	2.37
5.00x80	100	1.86	2.37
5.00x100	100	1.86	2.37
5.00x120	100	1.86	2.37
5.00x150	100	1.86	2.37
5.00x200	100	1.86	2.37
6.00x20	60	2.06	2.57
6.00x30	60	2.06	2.57
6.00x40	60	2.06	2.57
6.00x60	100	2.06	2.57
6.00x80	100	2.06	2.57
6.00x100	100	2.06	2.57
6.00x120	100	2.06	2.57
6.00x150	100	2.06	2.57
6.00x200	100	2.06	2.57
7.00x20	60	2.27	2.77
7.00x30	60	2.27	2.77
7.00x40	60	2.27	2.77
7.00x60	100	2.27	2.77
7.00x80	100	2.27	2.77
7.00x100	100	2.27	2.77
7.00x120	100	2.27	2.77
7.00x150	100	2.27	2.77
7.00x200	100	2.27	2.77
8.00x20	60	2.27	2.77
8.00x30	60	2.27	2.77
8.00x40	60	2.27	2.77
8.00x60	100	2.27	2.77
8.00x80	100	2.27	2.77
8.00x100	100	2.27	2.77
8.00x120	100	2.27	2.77
8.00x150	100	2.27	2.77
8.00x200	100	2.27	2.77
9.00x20	60	2.52	3.03

9.00x30	60	2.52	3.03
9.00x40	60	2.52	3.03
9.00x60	100	2.52	3.03
9.00x80	100	2.52	3.03
9.00x100	100	2.52	3.03
9.00x120	100	2.52	3.03
9.00x150	100	2.52	3.03
9.00x200	100	2.52	3.03
10.00x20	60	2.52	3.03
10.00x30	60	2.52	3.03
10.00x40	60	2.52	3.03
10.00x60	100	2.52	3.03
10.00x80	100	2.52	3.03
10.00x100	100	2.52	3.03
10.00x120	100	2.52	3.03
10.00x150	100	2.52	3.03
10.00x200	100	2.52	3.03

Таблица 7.21.5 Характеристики инструмента для повторного сворачивания катетера баллонного дилатационного Castor NC PTA

Размер баллона	Длина (мм), ± 5 мм	Внутренний диаметр (мм), ± 0.03 мм	Внешний диаметр (мм), ± 0.06 мм
2.00x10	60	1.12	1.63
2.00x15	60	1.12	1.63
2.00x20	60	1.12	1.63
2.00x30	60	1.12	1.63
2.00x40	60	1.12	1.63
2.00x60	100	1.12	1.63
2.00x80	100	1.12	1.63
2.00x100	100	1.12	1.63
2.00x150	100	1.12	1.63
2.50x10	60	1.27	1.78
2.50x15	60	1.27	1.78
2.50x20	60	1.27	1.78
2.50x30	60	1.27	1.78
2.50x40	60	1.27	1.78
2.50x60	100	1.27	1.78
2.50x80	100	1.27	1.78
2.50x100	100	1.27	1.78
2.50x150	100	1.27	1.78
3.00x10	60	1.27	1.78
3.00x15	60	1.27	1.78
3.00x20	60	1.27	1.78
3.00x30	60	1.27	1.78

3.00x40	60	1.27	1.78
3.00x60	100	1.27	1.78
3.00x80	100	1.27	1.78
3.00x100	100	1.27	1.78
3.00x150	100	1.27	1.78
3.50x10	60	1.5	2.01
3.50x15	60	1.5	2.01
3.50x20	60	1.5	2.01
3.50x30	60	1.5	2.01
3.50x40	60	1.5	2.01
3.50x60	100	1.5	2.01
3.50x80	100	1.5	2.01
3.50x100	100	1.5	2.01
3.50x150	100	1.5	2.01
4.00x10	60	1.5	2.01
4.00x15	60	1.5	2.01
4.00x20	60	1.5	2.01
4.00x30	60	1.5	2.01
4.00x40	60	1.5	2.01
4.00x60	100	1.5	2.01
4.00x80	100	1.5	2.01
4.00x100	100	1.5	2.01
4.00x150	100	1.5	2.01
4.50x10	60	1.5	2.01
4.50x15	60	1.5	2.01
4.50x20	60	1.5	2.01
4.50x30	60	1.5	2.01
4.50x40	60	1.5	2.01
4.50x60	100	1.5	2.01
4.50x80	100	1.5	2.01
4.50x100	100	1.5	2.01
4.50x150	100	1.5	2.01
5.00x10	60	1.68	2.19
5.00x15	60	1.68	2.19
5.00x20	60	1.68	2.19
5.00x30	60	1.68	2.19
5.00x40	60	1.68	2.19
5.00x60	100	1.68	2.19
5.00x80	100	1.68	2.19
5.00x100	100	1.68	2.19
5.00x150	100	1.68	2.19
5.50x10	60	1.76	2.27
5.50x15	60	1.76	2.27
5.50x20	60	1.76	2.27
5.50x30	60	1.76	2.27

5.50x40	60	1.76	2.27
5.50x60	100	1.76	2.27
5.50x80	100	1.76	2.27
5.50x100	100	1.76	2.27
5.50x150	100	1.76	2.27
6.00x10	60	1.76	2.27
6.00x15	60	1.76	2.27
6.00x20	60	1.76	2.27
6.00x30	60	1.76	2.27
6.00x40	60	1.76	2.27
6.00x60	100	1.76	2.27
6.00x80	100	1.76	2.27
6.00x100	100	1.76	2.27
6.00x150	100	1.76	2.27
7.00x10	60	1.94	2.44
7.00x15	60	1.94	2.44
7.00x20	60	1.94	2.44
7.00x30	60	1.94	2.44
7.00x40	60	1.94	2.44
7.00x60	100	1.94	2.44
7.00x80	100	1.94	2.44
7.00x100	100	1.94	2.44
7.00x150	100	1.94	2.44
8.00x10	60	2.27	2.77
8.00x15	60	2.27	2.77
8.00x20	60	2.27	2.77
8.00x30	60	2.27	2.77
8.00x40	60	2.27	2.77
8.00x60	100	2.27	2.77
8.00x80	100	2.27	2.77
8.00x100	100	2.27	2.77
8.00x150	100	2.27	2.77

Таблица 7.21.6 Характеристики инструмента для повторного сворачивания катетера баллонного дилатационного Achilles NC PTA

Размер баллона	Длина (мм), ± 5 мм	Внутренний диаметр (мм), ± 0.03 мм	Внешний диаметр (мм), ± 0.06 мм
2.00x10	60	1.27	1.78
2.00x15	60	1.27	1.78
2.00x20	60	1.27	1.78
2.00x30	60	1.27	1.78
2.00x40	60	1.27	1.78
2.00x60	100	1.27	1.78
2.00x80	100	1.27	1.78
2.00x100	100	1.27	1.78

2.00x150	100	1.27	1.78
2.50x10	60	1.27	1.78
2.50x15	60	1.27	1.78
2.50x20	60	1.27	1.78
2.50x30	60	1.27	1.78
2.50x40	60	1.27	1.78
2.50x60	100	1.27	1.78
2.50x80	100	1.27	1.78
2.50x100	100	1.27	1.78
2.50x150	100	1.27	1.78
3.00x10	60	1.5	2.01
3.00x15	60	1.5	2.01
3.00x20	60	1.5	2.01
3.00x30	60	1.5	2.01
3.00x40	60	1.5	2.01
3.00x60	100	1.5	2.01
3.00x80	100	1.5	2.01
3.00x100	100	1.5	2.01
3.00x150	100	1.5	2.01
3.50x10	60	1.5	2.01
3.50x15	60	1.5	2.01
3.50x20	60	1.5	2.01
3.50x30	60	1.5	2.01
3.50x40	60	1.5	2.01
3.50x60	100	1.5	2.01
3.50x80	100	1.5	2.01
3.50x100	100	1.5	2.01
3.50x150	100	1.5	2.01
4.00x10	60	1.5	2.01
4.00x15	60	1.5	2.01
4.00x20	60	1.5	2.01
4.00x30	60	1.5	2.01
4.00x40	60	1.5	2.01
4.00x60	100	1.5	2.01
4.00x80	100	1.5	2.01
4.00x100	100	1.5	2.01
4.00x150	100	1.5	2.01
4.50x10	60	1.5	2.01
4.50x15	60	1.5	2.01
4.50x20	60	1.5	2.01
4.50x30	60	1.5	2.01
4.50x40	60	1.5	2.01
4.50x60	100	1.5	2.01
4.50x80	100	1.5	2.01
4.50x100	100	1.5	2.01

4.50x150	100	1.5	2.01
5.00x10	60	1.68	2.19
5.00x15	60	1.68	2.19
5.00x20	60	1.68	2.19
5.00x30	60	1.68	2.19
5.00x40	60	1.68	2.19
5.00x60	100	1.68	2.19
5.00x80	100	1.68	2.19
5.00x100	100	1.68	2.19
5.00x150	100	1.68	2.19
5.50x10	60	1.86	2.37
5.50x15	60	1.86	2.37
5.50x20	60	1.86	2.37
5.50x30	60	1.86	2.37
5.50x40	60	1.86	2.37
5.50x60	100	1.86	2.37
5.50x80	100	1.86	2.37
5.50x100	100	1.86	2.37
5.50x150	100	1.86	2.37
6.00x10	60	1.86	2.37
6.00x15	60	1.86	2.37
6.00x20	60	1.86	2.37
6.00x30	60	1.86	2.37
6.00x40	60	1.86	2.37
6.00x60	100	1.86	2.37
6.00x80	100	1.86	2.37
6.00x100	100	1.86	2.37
6.00x150	100	1.86	2.37
7.00x10	60	1.94	2.44
7.00x15	60	1.94	2.44
7.00x20	60	1.94	2.44
7.00x30	60	1.94	2.44
7.00x40	60	1.94	2.44
7.00x60	100	1.94	2.44
7.00x80	100	1.94	2.44
7.00x100	100	1.94	2.44
7.00x150	100	1.94	2.44
8.00x10	60	2.27	2.77
8.00x15	60	2.27	2.77
8.00x20	60	2.27	2.77
8.00x30	60	2.27	2.77
8.00x40	60	2.27	2.77
8.00x60	100	2.27	2.77
8.00x80	100	2.27	2.77
8.00x100	100	2.27	2.77

8.00x150	100	2.27	2.77
----------	-----	------	------

Таблица 7.21.7 Характеристики инструмента для повторного сворачивания катетера баллонного дилатационного Hermes NC PTA

Размер баллона	Длина (мм), ± 5 мм	Внутренний диаметр (мм), ± 0.03 мм	Внешний диаметр (мм), ± 0.06 мм
3.00x20	60	1.68	2.19
3.00x30	60	1.68	2.19
3.00x40	60	1.68	2.19
3.00x60	100	1.68	2.19
3.00x80	100	1.68	2.19
3.00x100	100	1.68	2.19
3.00x150	100	1.68	2.19
4.00x20	60	1.76	2.27
4.00x30	60	1.76	2.27
4.00x40	60	1.76	2.27
4.00x60	100	1.76	2.27
4.00x80	100	1.76	2.27
4.00x100	100	1.76	2.27
4.00x150	100	1.76	2.27
5.00x20	60	1.86	2.37
5.00x30	60	1.86	2.37
5.00x40	60	1.86	2.37
5.00x60	100	1.86	2.37
5.00x80	100	1.86	2.37
5.00x100	100	1.86	2.37
5.00x150	100	1.86	2.37
6.00x20	60	2.06	2.57
6.00x30	60	2.06	2.57
6.00x40	60	2.06	2.57
6.00x60	100	2.06	2.57
6.00x80	100	2.06	2.57
6.00x100	100	2.06	2.57
6.00x150	100	2.06	2.57
7.00x20	60	2.16	2.67
7.00x30	60	2.16	2.67
7.00x40	60	2.16	2.67
7.00x60	100	2.16	2.67
7.00x80	100	2.16	2.67
7.00x100	100	2.16	2.67
7.00x150	100	2.16	2.67
8.00x20	60	2.27	2.77
8.00x30	60	2.27	2.77
8.00x40	60	2.27	2.77
8.00x60	100	2.27	2.77



8.00x80	100	2.27	2.77
8.00x100	100	2.27	2.77
8.00x150	100	2.27	2.77
9.00x20	60	2.42	2.93
9.00x30	60	2.42	2.93
9.00x40	60	2.42	2.93
9.00x60	100	2.42	2.93
9.00x80	100	2.42	2.93
9.00x100	100	2.42	2.93
9.00x150	100	2.42	2.93
10.00x20	60	2.52	3.03
10.00x30	60	2.52	3.03
10.00x40	60	2.52	3.03
10.00x60	100	2.52	3.03
10.00x80	100	2.52	3.03
10.00x100	100	2.52	3.03
10.00x150	100	2.52	3.03

Комплект поставки изделия


1. Катетер баллонный дилатационный периферический – 1 шт/уп;
2. Инструмент для повторного сворачивания – 1 шт/уп;
3. Инструкция по применению -1 шт/уп;
4. Карточка соответствия – 1 шт/уп.

8. Маркировка и упаковка

Каждая изделие упаковывается в индивидуальную упаковку с этикеткой. Потребительская коробка содержит одну индивидуальную упаковку. На каждой потребительской упаковке есть маркировка.

Маркировка этикетки индивидуальной и потребительской упаковки содержит следующую информацию:

- Наименование изделия,
- Основные технические характеристики,
- Номер РУ,
- Информацию об уполномоченном представителе производителя на территории РФ,
- Состав медицинского изделия,
- Информацию о производителе,
- Обратитесь к инструкции по применению,
- Стерилизация оксидом этилена,
- Не использовать при повреждении упаковки,
- Запрет на повторное применение,
- Не стерилизовать повторно,
- Код партии,
- Дата истечения срока годности,
- Номер по каталогу,
- Маркировка CE,
- Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению,
- Уполномоченный представитель в Европейском сообществе,
- Температурный диапазон
- Апиrogenно,

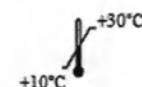



9. Соответствие стандартам Российской Федерации

ГОСТ ISO 10555-1-2011 «Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 1. Общие технические требования»

ГОСТ ISO 10555-4-2012 «Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения. Часть 4. Катетеры для баллонного расширения»

ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»

ГОСТ EN 556-1-2011 «Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории «стерильные». Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации»

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»

ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»

ГОСТ ISO 10993-4-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»

ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»

ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»

ОФС 1.2.4.0005.15 «Пирогенность»

ОФС.1.2.4.0003.15 «Стерильность».

10. Транспортирование, хранение и эксплуатация

Изделия (при поставке) транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность изделия в соответствии с условиями:

Условия транспортирования: Изделие следует транспортировать при температуре воздуха от +10°C до +30°C при относительной влажности от 60% до 80% (неконденсирующаяся).

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности от 60% до 80% (неконденсирующаяся). Хранить изделия в упаковке



предприятия-изготовителя в вентилируемом и сухом, чистом месте, защищать от попадания прямого солнечного света, при контролируемой температуре.

Условия эксплуатации: Изделие следует использовать при температуре от +32°C до +42°C при относительной влажности не более 80% (неконденсирующаяся).

11. Сведения о стерильности изделия

Изделие поставляется стерильным. Параметры стерилизации: газовый метод стерилизации (окись этилена) в соответствии с требованиями ISO 11135-1 (уровень остаточной контаминации 10-6). Изделие апиrogenно.

Повторная стерилизация изделия запрещена. Повторное применение запрещено.

12. Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

При неиспользовании изделия, повреждения индивидуальной упаковки и истечении гарантийного срока утилизацию проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

13. Гарантии

Это изделие спроектировано, изготовлено, испытано и упаковано в соответствии со всеми применимыми требованиями. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям всех нормативных и технических документов. Качество и безопасность изделий гарантируется в течение установленного срока годности в соответствии с условиями хранения/транспортировки. Не используйте изделие без маркировки или в случае повреждения маркировки/упаковки.

Гарантийный срок годности: 3 года, Срок сохранения стерильности – 3 года.

Производитель:

BrosMed Medical Co., Ltd. («БросМед Медикал Ко., Лтд»), Китай
15th Building, SMEs Venture Park, SongShan Lake Hi-tech Industrial Development Zone,
Dongguan, Guangdong, 523808, China

Тел.: +86 (769) 2289 2018

Факс: +86 (769) 2289 2016

Электронная почта: crystallee@brosmed.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»

(ООО «Компания «БиВи»)

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

ИНН 7722385440

Телефон: +7 (499) 281-67-68

Перевод с английского и китайского языков на русский язык

СЕРТИФИКАТ

/Логотип/

Китайский Совет по содействию международной торговле

Торгово-промышленная палата Китая

Китайский Совет по содействию международной торговле
Торгово-промышленная палата Китая

01129287

СЕРТИФИКАТ

QR-код
№ 234403A0/007755

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «БРОСМЕД МЕДИКАЛ КО., ЛТД.» на прилагаемой ДЕКЛАРАЦИИ является подлинной.

Китайский Совет по содействию международной торговле

Подпись уполномоченного лица: /Подпись/

Чэнь Цзин

Дата: 09 февраля 2023 г.

Тисненая печать: [Китайский Совет по
содействию международной торговле //
СЕРТИФИКАЦИЯ]

Печать: [Китайский Совет по содействию
международной торговле // СЕРТИФИКАЦИЯ]

Веб-сайт для проверки подлинности сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

/Логотип БросМед /
«БросМед Медикал Ко., Лтд.»
523808, Дунгуань
Высокотехнологичная зона Суншань Лэйк
Венчурный парк для СМП, здание 15

Утверждаю
Генеральный директор
БросМед Медикал Ко., Лтд.
Ли Бинь /подпись/
07.02.2023 г.

Печать: [«БросМед Медикал Ко., Лтд.», 4419520018422]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Юдиным Юрием Константиновичем.

Российская Федерация

Город Москва.

Четырнадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Юдина Юрия Константиновича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2023- 20-34

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Л.В. Дейнеко

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 53 лист(-а,-ов).

Л.В. Дейнеко

