


Фотографические Изображения



**Общий вид маски медицинской одноразовой трехслойной по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020.
Внешняя сторона маски. Цвет белый.**

Фотографические Изображения

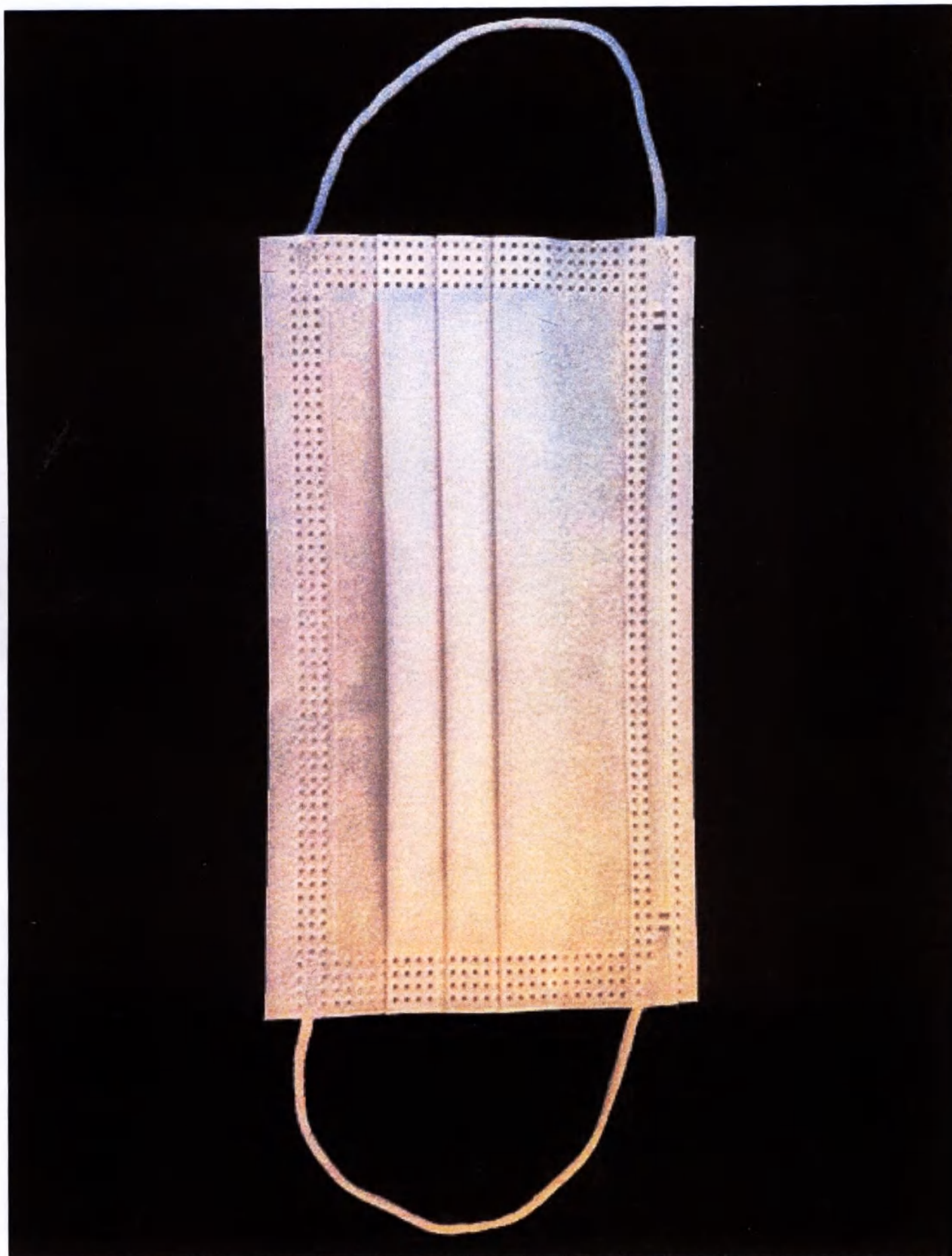

Общий вид маски медицинской одноразовой трехслойной по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020.
Внутренняя сторона маски. Цвет белый.


Фотографические Изображения



Общий вид маски медицинской одноразовой трехслойной по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020.

Внешняя сторона маски. Цвет голубой.

Фотографические Изображения

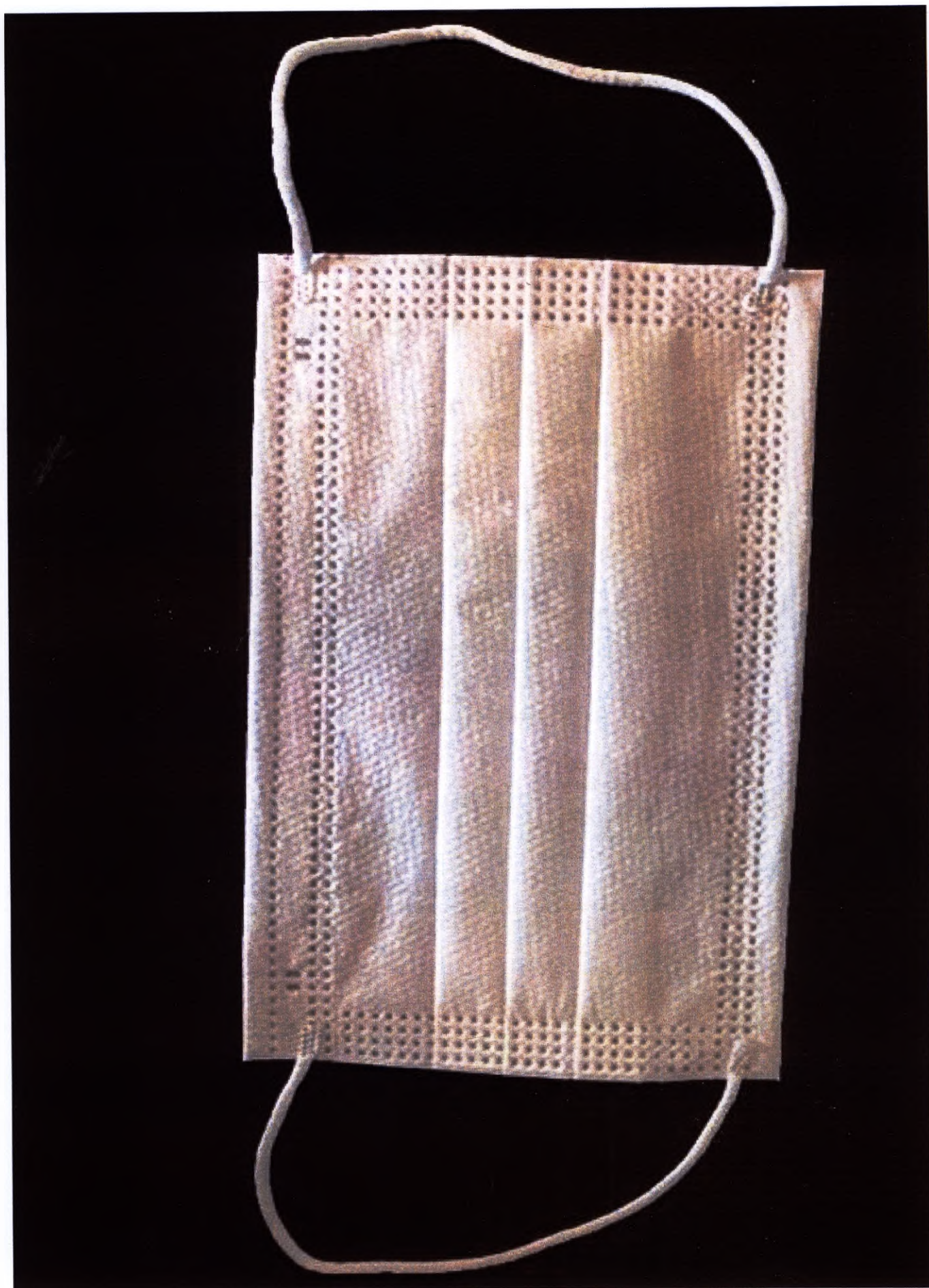

Общий вид маски медицинской одноразовой трехслойной по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020.
Внутренняя сторона маски. Цвет белый.

Фотографические Изображения

**МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ТРЕХСЛОЙНЫЕ "FTMASK"**

Производится по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020

Тип I, ГОСТ Р 58396 "Маски медицинские. Требования и методы испытаний."

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ: 10 шт**РАЗМЕР: 175 мм x 95 мм****КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:**

Слой 1 - гидрофобный нетканый материал Спанбонд

Слой 2 - высококачественный фильтр Мельтблаун

Слой 3 - абсорбирующий влагу комфортный материал Спанбонд

Ушные петли - шнур эластичный

Носовой фиксатор - с проволочным сердечником

ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО**ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИ:**

1. Откройте упаковку, достаньте 1 маску, плотно закройте
2. Заведите ушные петли за уши
3. Плотно прижмите носовой фиксатор по всей длине
4. Растяните маску вниз до подбородка. Складки на внешней стороне маски должны быть направлены вниз.
5. Обеспечьте плотное прилегание маски по сторонам лица
6. Маска строго одноразовая. Следует сменить маску после 2-3 часов использования или если маска стала влажной
7. Снимайте маску, держа за ушные петли
8. Утилизируйте маску согласно правилам утилизации изделий медицинского назначения
9. Вымойте руки после утилизации маски

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в упаковке при температуре от +10 до +35 °C и относительной влажности от 20 до 80 %. Не допускается воздействие прямого солнечного света. Хранить в местах, недоступных детям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Только для наружного применения.
- При обнаружении чувствительности к материалам маски прекратить использование. При необходимости обратиться к врачу.

Цвет:

☒ - Белый☐ - Голубой

ДАТА ПР-ВА:

Октябрь 2020

НОМЕР ПАРТИИ:

TE1120

ПРОИЗВЕДЕНО:

ИП Циклаури М. Г.

108820, г. Москва, п. Сосенское, ул.

Адмирала Корнилова, вл. 55, стр. 1, пом. 44


vscroff@ftmask.ru

Сделано в России



Общий вид со стороны маркировки. Индивидуальная упаковка для 10 масок с маркировкой.

Фотографические Изображения

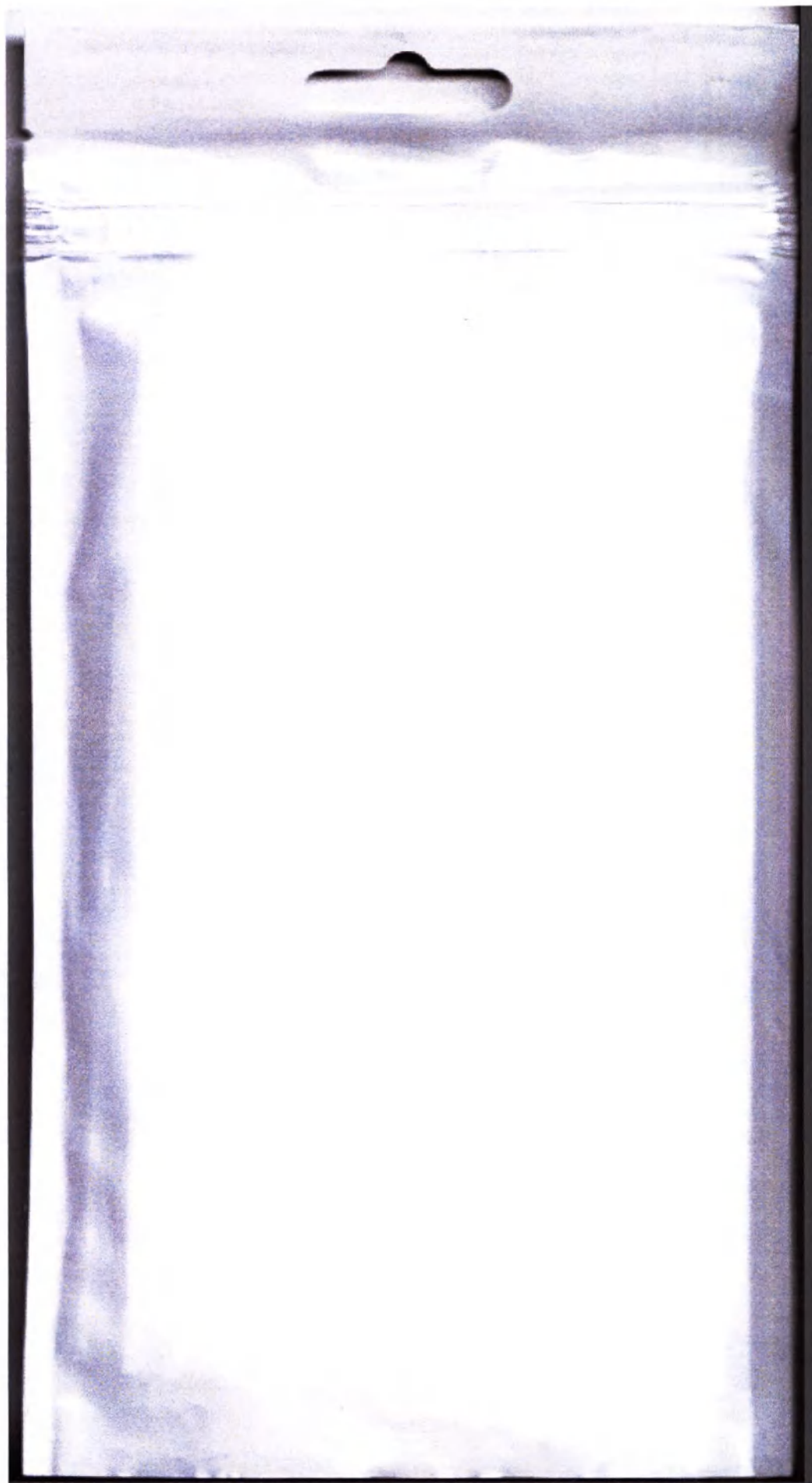

Общий вид с задней стороны упаковки. Индивидуальная упаковка для 10 масок.

Фотографические Изображения

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ "FTMASK"

Производится по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020

Тип I, ГОСТ Р 58396 "Маски медицинские. Требования и методы испытаний."

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ: 50 шт

РАЗМЕР: 175 мм x 95 мм

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Слой 1 - гидрофобный нетканый материал Спанбонд
Слой 2 - высококачественный фильтр Мельтблэун
Слой 3 - абсорбирующий влагу комфортный материал Спанбонд
Ушные петли - шнур эластичный
Носовой фиксатор - с проволочным сердечником

ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО

ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИ:

1. Откройте упаковку, достаньте 1 маску, плотно закройте
2. Заведите ушные петли за уши
3. Плотно прижмите носовой фиксатор по всей длине
4. Расправьте маску вниз до подбородка. Складки на внешней стороне маски должны быть направлены вниз
5. Обеспечьте плотное прилегание маски по сторонам лица
6. Маска строго одноразовая. Следует сменить маску после 2-3 часов использования или если маска стала влажной
7. Снимайте маску, держа за ушные петли
8. Утилизируйте маску согласно правилам утилизации изделий медицинского назначения
9. Вымойте руки после утилизации маски

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в упаковке при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности от 20 до 80 %. Не допускается воздействие прямого солнечного света. Хранить в местах, недоступных детям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Только для наружного применения.
- При обнаружении чувствительности к материалам маски прекратить использование. При необходимости обратиться к врачу.

Цвет:

☐ - Белый☒ - Голубой

ДАТА ПР-БА:

Январь 2021

НОМЕР ПАРТИИ:

AM01

ПРОИЗВЕДЕНО:

ИП Циклаури М. Г.

121059, г. Москва, п. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, вл. 5б, стр. 1, пом. 44


info@ftmask.ru

Сделано в России

УТИЛИЗАЦИЯ МАСОК:
смотри инструкциюСРОК ГОДНОСТИ:
60 месяцев от даты
изготовления

Общий вид со стороны маркировки. Индивидуальная упаковка для 50 масок с маркировкой.

Фотографические Изображения

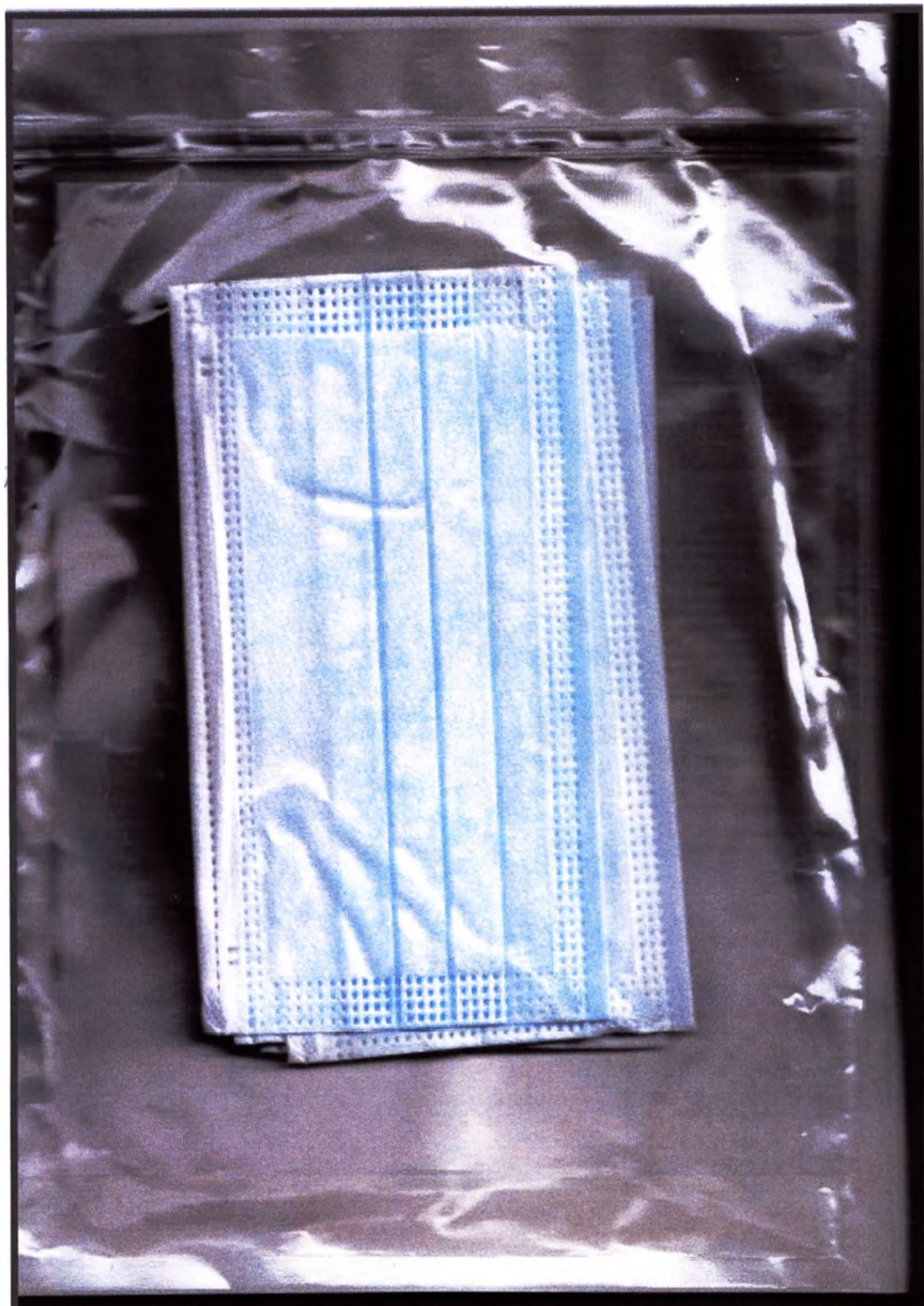

Общий вид с задней стороны упаковки. Индивидуальная упаковка для 50 масок.

121059, Москва, Украинский б-р. д. 7, кв. 56

Циклаური Михаил Георгиевич



Копия документа верна и мною
заверена.

Прошито и пронумеровано

9 листов

ИП Циклаури М.Г.

Подпись



**МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
ТРЕХСЛОЙНЫЕ "FTMASK"**

Производится по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020

Тип I, ГОСТ Р 58396 "Маски медицинские. Требования и методы испытаний."

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ: 10 шт**РАЗМЕР: 175 мм x 95 мм****КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:**

Слой 1 - гидрофобный нетканый материал Спанбонд

Слой 2 - высококачественный фильтр Мельтблаун

Слой 3 - абсорбирующий влагу комфортный материал Спанбонд

Ушные петли - шнур эластичный

Носовой фиксатор - с проволочным сердечником

ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО**ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИ:**

1. Откройте упаковку, достаньте 1 маску, плотно закройте
2. Заведите ушные петли за уши
3. Плотно прижмите носовой фиксатор по всей длине
4. Растяните маску вниз до подбородка. Складки на внешней стороне маски должны быть направлены вниз.
5. Обеспечьте плотное прилегание маски по сторонам лица
6. Маска строго одноразовая. Следует сменить маску после 2-3 часов использования или если маска стала влажной
7. Снимайте маску, держа за ушные петли
8. Утилизируйте маску согласно правилам утилизации изделий медицинского назначения
9. Вымойте руки после утилизации маски

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в упаковке при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности от 20 до 80 %. Не допускается воздействие прямого солнечного света. Хранить в местах, недоступных детям.

УТИЛИЗАЦИЯ МАСОК:

смотри инструкцию

СРОК ГОДНОСТИ:

60 месяцев от даты изготовления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Только для наружного применения.
- При обнаружении чувствительности к материалам маски прекратить использование. При необходимости обратиться к врачу.

Цвет:☐ - Белый☐ - Голубой**ДАТА ПР-ВА:****НОМЕР ПАРТИИ:****ПРОИЗВЕДЕНО:**

ИП Циклаури М. Г.

108820, г. Москва, п. Сосенское, ул.

Адмирала Корнилова, вл. 55, стр. 1, пом. 44

support@ftmask.ru

Сделано в России

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ "FTMASK"

Производится по ТУ 32.50.50-001-0197670938-2020

Тип I, ГОСТ Р 58396 "Маски медицинские. Требования и методы испытаний."

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ: 50 шт**РАЗМЕР: 175 мм x 95 мм****КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:**

Слой 1 - гидрофобный нетканый материал Спанбонд
Слой 2 - высококачественный фильтр Мельтблаун
Слой 3 - абсорбирующий влагу комфортный материал Спанбонд
Ушные петли - шнур эластичный
Носовой фиксатор - с проволочным сердечником

ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО**ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИ:**

1. Откройте упаковку, достаньте 1 маску, плотно закройте
2. Заведите ушные петли за уши
3. Плотно прижмите носовой фиксатор по всей длине
4. Растяните маску вниз до подбородка. Складки на внешней стороне маски должны быть направлены вниз.
5. Обеспечьте плотное прилегание маски по сторонам лица
6. Маска строго одноразовая. Следует сменить маску после 2-3 часов использования или если маска стала влажной
7. Снимайте маску, держа за ушные петли
8. Утилизируйте маску согласно правилам утилизации изделий медицинского назначения
9. Вымойте руки после утилизации маски

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

хранить в упаковке при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности от 20 до 80 %. Не допускается воздействие прямого солнечного света. Хранить в местах, недоступных детям.

УТИЛИЗАЦИЯ МАСОК:

смотри инструкцию

СРОК ГОДНОСТИ:

60 месяцев от даты изготовления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Только для наружного применения.
- При обнаружении чувствительности к материалам маски прекратить использование. При необходимости обратиться к врачу.

Цвет:

☐ - Белый☐ - Голубой

ДАТА ПР-ВА:

НОМЕР ПАРТИИ:

**ПРОИЗВЕДЕНО:**

ИП Циклаури М. Г.
108820, г. Москва, п. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, вл. 55, стр. 1, пом. 44
support@ftmask.ru

Сделано в России

Индивидуальный предприниматель
ИП Циклаури М.Г.

01 февраля 2021

Страница 2 из 2



М.Г. Циклаури

Копия документа верна и мною
заверена.

Прошито и пронумеровано

2 листов

ИП Циклаури М.Г.

Подпись

