

Директор
ООО «Камелот Медикал»



Ю.М. Трофимова

2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор одежды медицинской одноразовый, нестерильный
по ТУ 14.12.30-001-23336004-2021.

2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор одежды медицинской одноразовый, нестерильный по ТУ 14.12.30-001-23336004-2021, в следующих исполнениях:

1. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №1, в составе:

1.1. Халат без усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м² или Халат с усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², материал усиленной защитной зоны: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

1.2. Куртка, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

1.3. Брюки, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

1.4. Шапочка – шлем, или шапочка колпак, или шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка – берет, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² – не более 2 штук.

1.5. Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

1.6. Нарукавники, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, длина 23см, или 25см, или длина 30см, или длина 40см, или длина 45см, или длина 50см – не более 2 пар.

1.7 Фартук, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54или74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, длина 90см, или 100см, или 110см, или 120см, или 130см, или 140см, или 160см, или 170см или 180см - не более 2 штук.

1.8 Салфетка, материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², длина от 30,0см до 90,0см с интервалом 5,0 см; ширина от 30,0см до 60,0см с интервалом 5,0см - не более 2 штук.

1.9. Перчатки медицинские (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия, РУ №ФСР 2008/03089, (Перчатки медицинские хирургические нестерильные текстурированные опудренные SuperMax) или Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011: Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9, производства ООО «РусМедУпак», Россия, РУ № ФСР 2011/12244 или Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED : 1. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED латексные (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - опудренные (белые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные хлорированные (желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные с полимерным покрытием (белые, желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие). 2. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED нитриловые (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - неопудренные хлорированные (белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, зеленые). - неопудренные с полимерным покрытием (белые, голубое, синие, фиолетовые, розовые, зеленые), производства Перусахаан Джита Азас Сдн.Бхд. Малайзия, РУ №ФСЗ 2011/11024) - не более 2 пар.

1.10. Маска одноразовая, на резинках или на завязках (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ № ФСР 2010/08512, (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая трехслойная на резинках (SENSEсмб,) или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 варианты исполнения: - маска медицинская стандарт; - маска медицинская классик; - маска медицинская классик с рисунком; - маска медицинская классик элит; - маска медицинская хирургическая; - маска медицинская хирургическая против запотевания, производства ООО «КИТ» Россия, РУ №ФСР 2010/09673 или Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные , производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» Россия, РУ №ФСР 2010/07908) – не более 2 штук.

2. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №2, в составе:

2.1. Халат без усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м² или Халат с усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², материал усиленной защитной зоны: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 - не более 2 штук.

2.2. Куртка, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

2.3. Брюки, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность

20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

2.4. Шапочка – шлем, или шапочка колпак, или шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка – берет, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² – не более 2 штук.

2.5. Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

2.6. Салфетка, материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², длина от 30,0см до 90,0см с интервалом 5,0 см; ширина от 30,0см до 60,0см с интервалом 5,0см - не более 2 штук.

2.7. Перчатки медицинские (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия, РУ №ФСР 2008/03089, (Перчатки медицинские хирургические нестерильные текстурированные опудренные SuperMax) или Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011: Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9, производства ООО «РусМедУпак», Россия, РУ № ФСР 2011/12244 или Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED : 1. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED латексные (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - опудренные (белые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные хлорированные (желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные с полимерным покрытием (белые, желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие). 2. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED нитриловые (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - неопудренные хлорированные (белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, зеленые). - неопудренные с полимерным покрытием (белые, голубое, синие, фиолетовые, розовые, зеленые), производства Перусахаан Джита Азас Сдн.Бхд. Малайзия, РУ №ФСЗ 2011/11024) - не более 2 пар

2.8. Маска одноразовая, на резинках или на завязках (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ № ФСР 2010/08512, (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая трехслойная на резинках (SENSEсмб,) или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 варианты исполнения: - маска медицинская стандарт; - маска медицинская классик; - маска медицинская классик с рисунком; - маска медицинская классик элит; - маска медицинская хирургическая; - маска медицинская хирургическая против запотевания, производства ООО «КИТ» Россия, РУ №ФСР 2010/09673 или Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» Россия, РУ №ФСР 2010/07908) – не более 2 штук.

3. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №3, в составе:

3.1. Халат без усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м² или Халат с усиленной

защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², материал усиленной защитной зоны: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70- не более 2 штук.

3.2. Куртка, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

3.3. Брюки, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

3.4. Шапочка – шлем, или шапочка колпак, или шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка – берет, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² – не более 2 штук.

3.5. Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

3.6. Перчатки медицинские (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия. РУ №ФСР 2008/03089, (Перчатки медицинские хирургические нестерильные текстурированные опудренные SuperMax) или Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011: Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9, производства ООО «РусМедУпак», Россия, РУ № ФСР 2011/12244 или Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED : 1. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED латексные (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - опудренные (белые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные хлорированные (желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные с полимерным покрытием (белые, желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие). 2. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED нитриловые (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - неопудренные хлорированные (белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, зеленые). - неопудренные с полимерным покрытием (белые, голубое, синие, фиолетовые, розовые, зеленые), производства Перусахаан Джита Азас Сдн.Бхд. Малайзия, РУ №ФСЗ 2011/11024)- не более 2 пар.

3.7. Маска одноразовая, на резинках или на завязках (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ №ФСР 2010/08512, (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая трехслойная на резинках (SENSEсмб,) или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 варианты исполнения: - маска медицинская стандарт; - маска медицинская классик; - маска медицинская классик с рисунком; - маска медицинская классик элит; - маска медицинская хирургическая; - маска медицинская хирургическая против запотевания, производства ООО «КИТ» Россия, РУ №ФСР 2010/09673 или Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» Россия, РУ №ФСР 2010/07908) – не более 2 штук.

4. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №4, в составе:

4.1. Комбинезон, материалы: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², длиной от 140,0 до 190,0 с интервалом 5,0см – не более 2 штук.

4.2. Шапочка – шлем, или шапочка колпак, или шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка – берет, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² – не более 2 штук

4.3. Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

4.4. Салфетка, материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², длина от 30,0см до 90,0см с интервалом 5,0 см; ширина от 30,0см до 60,0см с интервалом 5,0см - не более 2 штук.

4.5. Перчатки медицинские (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия. РУ №ФСР 2008/03089, (Перчатки медицинские хирургические нестерильные текстурированные опудренные SuperMax) или Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011: Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9, производства ООО «РусМедУпак», Россия, РУ №ФСР 2011/12244 или Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED : 1. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED латексные (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - опудренные (белые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные хлорированные (желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные с полимерным покрытием (белые, желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие). 2. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED нитриловые (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - неопудренные хлорированные (белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, зеленые). - неопудренные с полимерным покрытием (белые, голубое, синие, фиолетовые, розовые, зеленые), производства Перусахаан Джита Азас Сдн.Бхд. Малайзия, РУ №ФСР 2011/11024) - не более 2 пар.

4.6. Маска одноразовая, на резинках или на завязках (Маска медицинская из нетканого материала

одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ №ФСР 2010/08512, (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая трехслойная на резинках (SENSEсмб,) или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 варианты исполнения: - маска медицинская стандарт; - маска медицинская классик; - маска медицинская классик с рисунком; - маска медицинская классик элит; - маска медицинская хирургическая; - маска медицинская хирургическая против запотевания, производства ООО «КИТ» Россия, РУ №ФСР 2010/09673 или Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» Россия, РУ №ФСР 2010/07908) – не более 2 штук.

5. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №5, в составе:

5.1. Куртка, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

5.2. Брюки, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

6. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №6, в составе:

6.1. Комбинезон, материалы: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², длиной от 140,0 до 190,0 с интервалом 5,0см – не более 2 штук.

6.2. Салфетка, материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², длина от 30,0см до 90,0см с интервалом 5,0 см; ширина от 30,0см до 60,0см с интервалом 5,0см - не более 2 штук.

6.3. Перчатки медицинские (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия. РУ №ФСР 2008/03089, (Перчатки медицинские хирургические нестерильные текстурированные опудренные SuperMax) или Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011: Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9, производства ООО «РусМедУпак», Россия, РУ №ФСР 2011/12244 или Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED : 1. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED латексные (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - опудренные (белые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные хлорированные (желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные с полимерным покрытием (белые, желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие). 2. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED нитриловые (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - неопудренные хлорированные (белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, зеленые). - неопудренные с полимерным покрытием (белые, голубое, синие, фиолетовые, розовые, зеленые), производства Перусахаан Джита Азас Сдн.Бхд. Малайзия, РУ №ФСЗ 2011/11024) - не более 2 пар.

6.4. Маска одноразовая, на резинках или на завязках (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ №ФСР 2010/08512, (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая трехслойная на резинках (SENSEсмб,) или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 варианты исполнения: - маска медицинская стандарт; - маска медицинская классик; - маска медицинская классик с рисунком; - маска медицинская классик элит; - маска медицинская хирургическая; - маска медицинская хирургическая против запотевания, производства ООО «КИТ» Россия, РУ №ФСР 2010/09673 или Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-

64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» Россия, РУ №ФСР 2010/07908) – не более 2 штук.

7. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №7, в составе:

7.1. Куртка, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук

7.2. Брюки, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук

7.3 Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар

8. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №8, в составе:

8.1. Куртка, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук

8.2. Брюки, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

8.3 Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

8.4 Шапочка – шлем, или шапочка колпак, или шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка – берет, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² – не более 2 штук.

9. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №9, в составе:

9.1. Комбинезон, материалы: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², длиной от 140,0 до 190,0 с интервалом 5,0см – не более 2 штук.

9.2. Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

9.3. Перчатки медицинские (Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия. РУ №ФСР 2008/03089, (Перчатки медицинские хирургические нестерильные текстурированные опудренные SuperMax) или Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011: Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9, производства ООО «РусМедУпак», Россия, РУ № ФСР 2011/12244 или Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED : 1. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED латексные (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - опудренные (белые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные хлорированные (желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные с полимерным покрытием (белые, желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие). 2. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED нитриловые (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - неопудренные хлорированные (белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, зеленые). - неопудренные с полимерным покрытием (белые, голубое, синие, фиолетовые, розовые, зеленые), производства Перусахаан Джита Азас Сдн.Бхд. Малайзия, РУ №ФСЗ 2011/11024) - не более 2 пар.

10. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №10, в составе:

10.1. Комбинезон, материалы: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², длиной от 140,0 до 190,0 с интервалом 5,0см – не более 2 штук.

10.2. Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с

интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

11. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №11, в составе:

11.1. Халат без усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м² или Халат с усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², материал усиленной защитной зоны: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 - не более 2 штук.

11.2. Брюки, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 – не более 2 штук.

11.3. Бахилы высокие с двойной подошвой (или без), материал: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 36,0см до 65,0см с интервалом 2,0 см, длина ступни от 36,0см до 42,0см с интервалом 2,0 см или Бахилы низкие, материал: Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м², Полиэтилен, плотность 60 мкм, СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², высота от 6,0см до 35,0см с интервалом 1,0 см, длина ступни от 9,0см до 50,0см с интервалом 1,0см – не более 2 пар.

12. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №12, в составе:

12.1. Халат без усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м² или Халат с усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², материал усиленной защитной зоны: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 - не более 5 штук

12.2. Шапочка – шлем, или шапочка колпак, или шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка – берет, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30,

35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м² или СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² – не более 5 штук.

13. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №13, в составе:

13.1. Нарукавники, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, длина 23см, или 25см, или длина 30см, или длина 40см, или длина 45см, или длина 50см – не более 10 пар.

13.2. Фартук, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, длина 90см, или 100см, или 110см, или 120см, или 130см, или 140см, или 160см, или 170см или 180см - не более 10 штук.

14. Набор одежды медицинской, одноразовый нестерильный, КВИ №14, в составе:

14.1. Халат без усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м² или Халат с усиленной защитной зоной, материал: СС, плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45 или 60 г/м², СМС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м², СММС, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45 или 60 г/м² или Спанлейс, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, или 60 г/м², материал усиленной защитной зоны: Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м², Сантейс, плотность 54 или 74 г/м², Спанбонд ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50 или 60 г/м², СММС ламинированный, плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55 или 60 г/м² или Полиэтилен, плотность 60 мкм, размер 44-46, или 46-48, или 48-50, или 50-52, или 52-54, или 54-56, или 56-58, или 58-60, или 60-62, или 62-64, или 64-66, или 66-68, или 68-70 - не более 10 штук.

14.2. Маска одноразовая, на резинках или на завязках (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ №ФСР 2010/08512, (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая трехслойная на резинках (SENSEсмб,) или Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 варианты исполнения: - маска медицинская стандарт; - маска медицинская классик; - маска медицинская классик с рисунком; - маска медицинская классик элит; - маска медицинская хирургическая; - маска медицинская хирургическая против запотевания, производства ООО «КИТ» Россия, РУ №ФСР 2010/09673 или Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» Россия, РУ №ФСР 2010/07908) – не более 10 штук.

(далее по тексту - "набор одежды" или "изделие").

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор одежды предназначен для применения медицинским персоналом во время осмотра пациента/проведения медицинских процедур для поддержания гигиены, предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами, загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор одежды может быть использована в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах, в социальных учреждениях, как высококвалифицированным медицинским персоналом, так и младшим медицинским персоналом.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Для применения медицинским персоналом во время осмотра пациента/проведения медицинских процедур для поддержания гигиены, предотвращения перекрестного заражения микроорганизмами, загрязнения физиологическими жидкостями и твердыми частицами между пациентом и персоналом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия. Побочные действия медицинского изделия отсутствуют.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Изделие с истекшим сроком годности использовать нельзя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Отсутствуют.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Используется совместно с любыми медицинскими изделиями разрешенными к применению в медицинской практике.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 1). Ознакомиться с инструкцией по применению изделия.
- 2). Открыть упаковку.
- 3). Использовать изделие по назначению.

СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)

Срок годности изделия – 5 лет, с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 14.12.30-001-23336004-2021. при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Не использовать после окончания срока годности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 80% при 25 °С

Транспортирование изделия в транспортной таре осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 100% при 25 °С

УКАЗАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хранить в местах недоступных для детей.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В комплект поставки должны входить:

- набор одежды медицинской одноразовый нестерильный, в соответствии с вариантом исполнения, потребительской упаковке с маркировкой – 1 уп.;
- инструкция по применению – 1 (одна) штука на 1 (одну) транспортную упаковку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

Набор одежды включает ассортимент следующих изделий: Халат, без (или с) усиленной защитной зоной, Куртка, Брюки, Фартук, Нарукавники, Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) или Бахилы низкие, Шапочка (или шлем, или берет, или колпак, или косынка, или бандана), Маска одноразовая на резинках или на завязках, Салфетка, Перчатки медицинские, Комбинезон.


Основные линейные размеры изделий должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах 1 – 16.

Таблица 1. Халат без усиленной защитной зоны


Наименование показателя	Размер 44-46	Размер 46-48	Размер 48-50	Размер 50-52	Размер 52-54	Размер 54-56
Длина изделия (А), см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см
Общая ширина на уровне глубины проймы (Б), см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава (В), см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см
Ширина проймы, см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см
Ширина рукава внизу (Г), см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см
Длина липучки, (общая), при наличии см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,
Ширина липучки, при наличии см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,
Длина манжеты, при наличии, см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0, с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0, с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0, с интервалом 1см
Ширина манжеты, при наличии, см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см
Длина (общая) резинки, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см
Ширина/диаметр резинки, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязок, см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см
Ширина завязок, см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см

Наименование показателя	Размер 56-58	Размер 58-60	Размер 60-62	Размер 62-64	Размер 64-66	Размер 66-68	Размер 68-70
Длина изделия (А), см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см
Общая ширина на уровне глубины проймы (Б), см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава (В), см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см
Ширина проймы, см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см
Ширина рукава внизу (Г), см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см
Длина липучки, (общая), при наличии см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,
Ширина липучки, при наличии см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,
Длина манжеты, при наличии, см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см
Ширина манжеты, при наличии, см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см
Длина (общая) резинки, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см
Ширина/диаметр резинки, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязок, см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см
Ширина завязок, см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

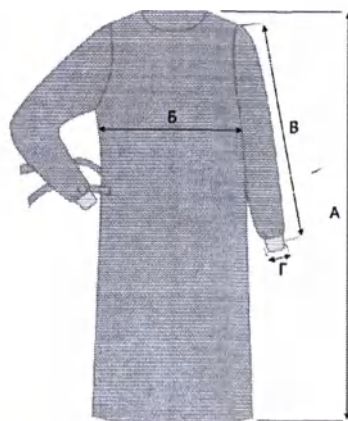

а) Вид спереди

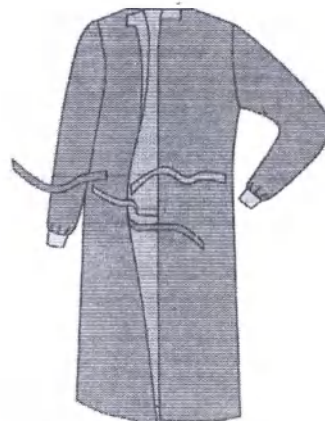

б) Вид сзади

Таблица 2. Халат с усиленной защитной зоной.

Наименование показателя	Размер 44-46	Размер 46-48	Размер 48-50	Размер 50-52	Размер 52-54	Размер 54-56
Длина изделия (А), см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см
Общая ширина на уровне глубины проймы (Б), см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см	От 140,0 до 160,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава (В), см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см
Ширина проймы, см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,0 с интервалом 1,00 см
Ширина рукава внизу (Г), см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,0 с интервалом 0,5 см
Длина липучки, (общая), при наличии, см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2 см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2 см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2 см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2 см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2 см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2 см
Ширина липучки, при наличии, см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2 см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2 см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2 см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2 см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2 см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2 см
Длина манжеты, (З) при наличии, см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1 см
Ширина манжеты (З), при наличии, см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см
Длина (общая) резинки, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см
Ширина/диаметр резинки, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязок, см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0 см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0 см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0 см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0 см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0 см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0 см
Ширина завязок (К), см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см

Наименование показателя	Размер 56-58	Размер 58-60	Размер 60-62	Размер 62-64	Размер 64-66	Размер 66-68	Размер 68-70
Длина изделия (А), см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см	От 90,0 до 160,0 с интервалом 5,00 см
Общая ширина на уровне глубины проймы (Б), см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см	От 150,0 до 180,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава (В), см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 88,0 с интервалом 1,00 см
Ширина проймы, см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см	От 26,0 до 36,00 с интервалом 1,00 см
Ширина рукава внизу (Г), см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см	От 14,0 до 22,00 с интервалом 0,5 см
Длина липучки, (общая), при наличии см	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,	От 4,0 до 12,0 с интервалом 0,2см,
Ширина липучки , при наличии, см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см,
Длина манжеты, при наличии, см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1см
Ширина манжеты (З), при наличии, см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5см
Длина (общая) резинки, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см
Ширина/диаметр резинки, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязок, см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см	От 65,0 до 85,0 с интервалом 1,0см
Ширина завязок (К), см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%



а) Вид спереди


б) Вид сзади

Таблица 3. Куртка


Наименование показателя	Размер 44-46	Размер 46-48	Размер 48-50	Размер 50-52	Размер 52-54	Размер 54-56
Длина изделия (Н1), см	От 70,0 до 90,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 90,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 90,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 90,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 90,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 90,0 с интервалом 5,00 см
Ширина изделия (С1 и С2), см	От 55,0 до 66,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 66,0 с интервалом 1,00 см	От 63,0 до 72,0 с интервалом 1,00 см	От 63,0 до 72,0 с интервалом 1,00 см	От 63,0 до 72,0 с интервалом 1,00 см	От 63,0 до 72,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава, длинного (L2), см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава короткого (L1), см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см
Длина изделия от выреза до низа (Н2), см	От 58,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 58,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 58,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 58,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 58,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 58,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см
Длина манжеты, при наличии, см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см
Ширина манжеты, при наличии, см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см
Длина (общая) резинки, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см
Ширина/диаметр резинки, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Размеры карманов, при наличии, с интервалом 0,1 см, см						
длина, см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см
ширина, см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см

Наименование показателя	Размер 56-58	Размер 58-60	Размер 60-62	Размер 62-64	Размер 64-66	Размер 66-68	Размер 68-70
Длина изделия (Н1), см	От 70,0 до 95,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 95,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 95,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 95,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 100,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 100,0 с интервалом 5,00 см	От 70,0 до 100,0 с интервалом 5,00 см
Ширина изделия (С1 и С2), см	От 70,0 до 80,0 с интервалом 1,00 см	От 70,0 до 80,0 с интервалом 1,00 см	От 70,0 до 80,0 с интервалом 1,00 см	От 70,0 до 80,0 с интервалом 1,00 см	От 78,0 до 90,0 с интервалом 1,00 см	От 78,0 до 90,0 с интервалом 1,00 см	От 78,0 до 90,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава, длинного (L2), см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см	От 55,0 до 82,0 с интервалом 1,00 см
Длина рукава короткого (L1), см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см	От 25,0 до 40,0 с интервалом 1,00 см
Длина изделия от выреза до низа (Н2), см	От 60,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 60,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 60,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 60,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 60,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 60,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см	От 60,0 до 65,0 с интервалом 1,00 см
Длина манжеты, при наличии, см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1,00 см
Ширина манжеты, при наличии, см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см
Длина (общая) резинки, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,00 см
Ширина/диаметр резинки, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Размеры карманов, при наличии, с интервалом 0,1 см, см							
длина, см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см
ширина, см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см	От 0,15 до 0,2 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

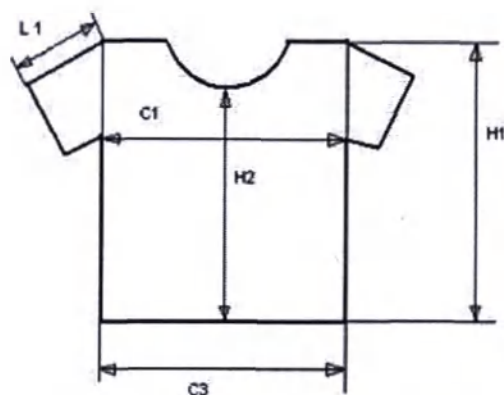

с коротким рукавом

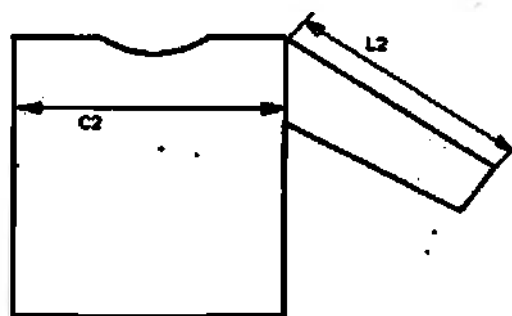

с длинным рукавом

Таблица 4. Брюки

Наименование показателя	Размер 44-46	Размер 46-48	Размер 48-50	Размер 50-52	Размер 52-54	Размер 54-56
Длина изделия (А), см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см
Ширина изделия (В), см	От 50,0 до 55,0 с интервалом 1,0 см	От 50,0 до 55,0 с интервалом 1,0 см	От 53,0 до 63,0 с интервалом 1,0 см	От 53,0 до 63,0 с интервалом 1,0 см	От 53,0 до 63,0 с интервалом 1,0 см	От 53,0 до 63,0 с интервалом 1,0 см
Длина шагового шва (L), 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см
Ширина брюк внизу (Н), см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см
Длина резинки наверху, при наличии, см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1 см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1 см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1 см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1 см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1 см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1 см
Длина резинки внизу, при наличии, см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5 см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5 см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5 см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5 см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5 см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5 см
Ширина/диаметр резинки наверху/внизу, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязки наверху, при наличии, см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см
Ширина завязки наверху, при наличии, см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5 см

Наименование показателя	Размер 56-58	Размер 58-60	Размер 60-62	Размер 62-64	Размер 64-66	Размер 66-68	Размер 68-70
Длина изделия (А), см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 100,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см
Ширина изделия (В), см	От 61,0 до 71,0 с	От 61,0 до 71,0 с	От 61,0 до 71,0 с	От 61,0 до 71,0 с	От 69,0 до 79,0 с	От 69,0 до 79,0 с	От 69,0 до 79,0 с

	интервалом 1,0 см	интервалом 1,0 см	интервалом 1,0 см	интервалом 1,0 см	интервалом 1,0 см	интервалом 1,0 см	интервалом 1,0 см
Длина шагового шва (L), 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см	От 75,0 до 90,0 с интервалом 1,0 см
Ширина брюк внизу (H), см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см	От 27,0 до 35,0 с интервалом 1,0 см
Длина резинки наверху, при наличии, см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1см	От 60,0 до 90,0 с интервалом 1см
Длина резинки внизу, при наличии, см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5см	От 30,0 до 40,0 с интервалом 0,5см
Ширина/диаметр резинки наверху/внизу, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязки наверху, при наличии, см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см	От 110,0 до 130,0 с интервалом 1,0 см
Ширина завязки наверху, при наличии, см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см	От 3,0 до 5,0 с интервалом 0,5см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%


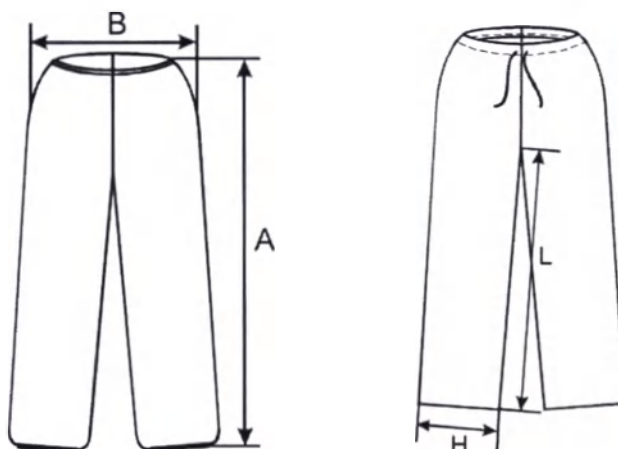


Таблица 5 . Фартук

Длина изделия (А), см	Ширина изделия см	Длина/Ширин а завязок (В), см	Лямка на шее Длина/Ширина завязок, см	Завязки на шее Длина общая /Ширина завязок, см
90 или 100 или 110 или 120 или 130 или 140 или 160 или 170 или 180	от 40 до 150 с интервалом 5 см	не менее 40,0/ 8,0 -10,0	от 45,0 до 55,00/ 7,0 -9,0	не менее 40,0/ 7,0 - 9,0

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

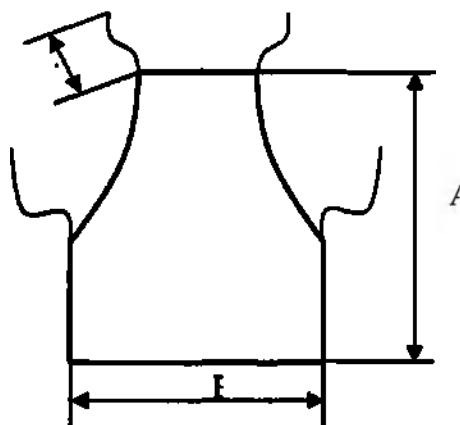

Фартук (завязка на шее)




Фартук (с лямкой на шее)

Таблица 6 . Нарукавники

Длина изделия (А), см	23, или 25, или 30, или 40, или 45, или 50
Ширина изделия в верхней части (Б), см	от 18,0 до 25,0 с интервалом 0,5 см
Ширина изделия в нижней части (В), см	от 18,0 до 25,0 с интервалом 0,5 см
Длина манжеты, см	От 3,0 до 10,0 с интервалом 1 см
Ширина манжеты, см	От 5,0 до 7,0 с интервалом 0,5 см
Длина (общая) резинки, при фиксации на резинке с обеих сторон (Б, В),	От 96,0 до 116,0 с интервалом 1,0 см
Длина (общая) резинки с фиксацией на резинке и манжете, см	От 56,0 до 70,0 с интервалом 1,0 см
Ширина/диаметр резинки при фиксации на резинке с обеих сторон (Б, В)/ с фиксацией на резинке и манжете, см	от 0,2 до 0,9 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Нарукавники с фиксацией на резинке с обеих сторон.

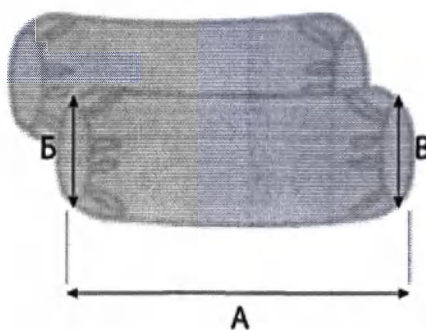

Нарукавники с фиксацией на резинке и манжете



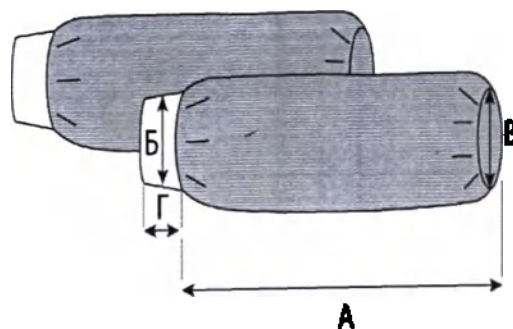


Таблица 7. Бахилы высокие


Высота изделия (А), см	от 36,0 до 65,0 с интервалом 2,0 см
Длина ступни (Б), см	от 36,0 до 42,0 с интервалом 2,0 см
Высота второй подошвы, при наличии, см	от 8,0 до 15,0 с интервалом 0,5 см
Длина ступни второй подошвы, при наличии, см	от 36,0 до 65,0 с интервалом 1,0 см
Длина резинки (общая), (при наличии), см	от 50,0 до 70,0 интервалом 0,5 см
Ширина/диаметр резинки, (при наличии), см	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязок (при наличии), см	от 40,0 до 50,0 с интервалом 0,5 см
Ширина завязок (при наличии), см	От 3,0 до 5,0 интервалом 0,5 см
Длина резинки (общая),	
Ширина/диаметр резинки,	от 0,2 до 0,9 см
Наверху изделия, см	от 50,0 до 70,0 с интервалом 0,5 см
Посередине изделия, см	от 50,0 до 70,0 с интервалом 0,5 см
На носке изделия, см	от 40,0 до 56,0 с интервалом 0,5 см
Длина резинки (общая), см	от 50,0 до 70,0 с интервалом 0,5 см
Ширина/диаметр резинки,	от 0,2 до 0,9 см
Длина завязок, см	от 40,0 до 50,0 с интервалом 0,5 см
Ширина завязок, см	От 3,0 до 5,0 интервалом 0,5 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

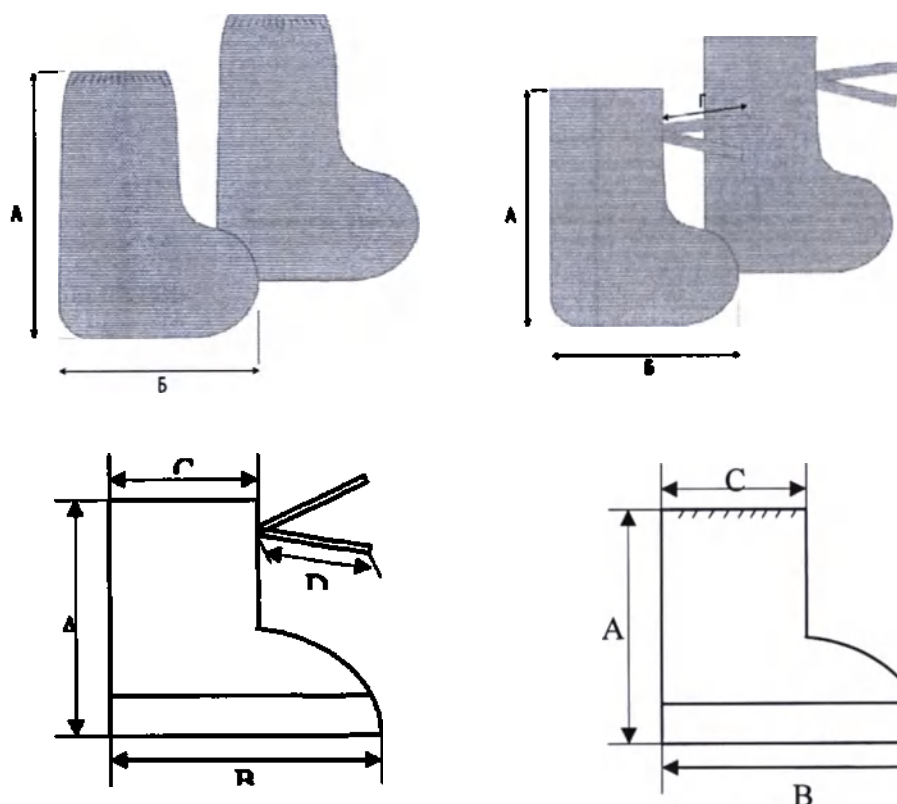


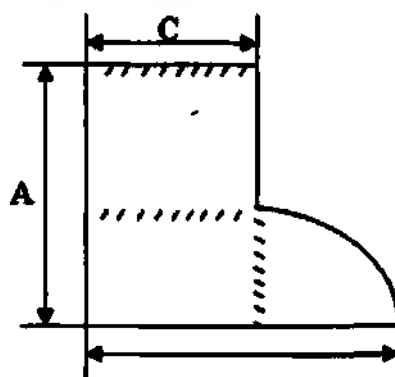

Бахилы высокие на трех резинках

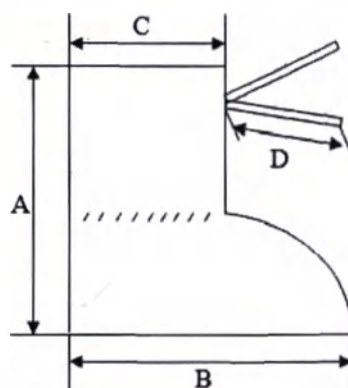

Бахилы высокие на завязках и на резинке

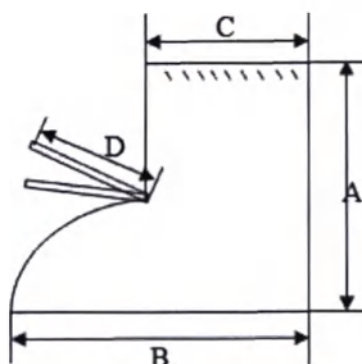

Бахилы высокие на резинке и на завязках.

Таблица 8. Бахилы низкие

Высота изделия (А), см	от 6 до 35 с интервалом 1 см
Длина ступни (Б), см	от 9 до 50 с интервалом 1 см
Длина резинки (общая), (при наличии), см	от 30,0 до 60,0 с интервалом 1,0 см
Ширина/диаметр резинки, см	от 0,2 до 0,9 см
Длина липучки (общая), (при наличии), см	От 20,0 до 50,0 с интервалом 1,0см
Ширина липучки, при наличии, см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см
Высота второй подошвы, при наличии, см	от 3,0 до 10,0 с интервалом 1,0 см
Длина ступни второй подошвы, при наличии, см	от 9,0 до 50,0 с интервалом 1,0 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%


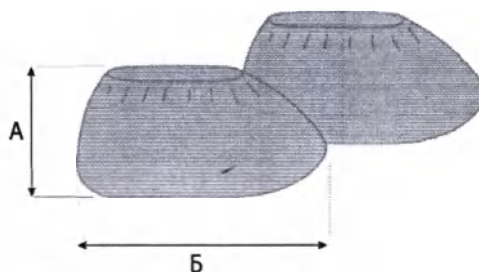


Таблица 9. Шапочка - колпак, или Шапочка - берет


Шапочка - колпак, или Шапочка - берет

Вариант исполнения / Модель	Диаметр (для изделий на резинке в растянутом состоянии) (А), см	Высота изделия (Б), см	Длина завязок (при наличии) (В), см	Диаметр донышка (Е), см	Длина резинки (при наличии) см	Ширина/диаметр резинки,
Колпак	-	от 10,0 до 30,0 с интервалом 1 см	От 20,0 до 25,0 с интервалом 1 см	от 18,0 до 25,0 с интервалом 0,5 см	-	-
Берет	от 25,0 до 65,0 с интервалом 1 см	от 10,0 до 30,0 с интервалом 1 см	-	от 25,0 до 32,0 с интервалом 0,5 см	От 35,0 до 60,0 с интервалом 1,0 см	от 0,2 до 0,9 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

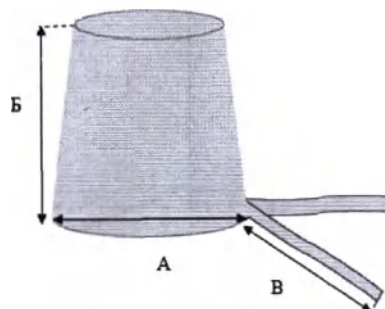

Шапочка - колпак

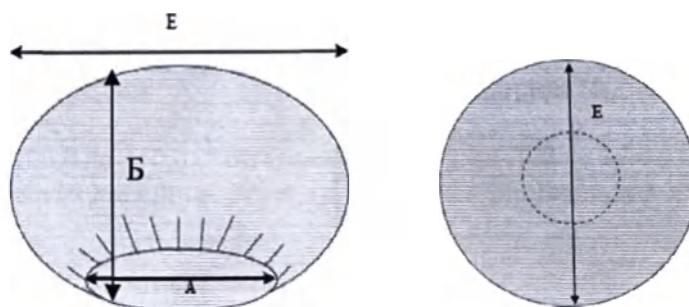

Вид сбоку

Вид сверху

Шапочка - берет

Таблица 10. Шапочка - шлем

Вариант исполнения / Модель	Высота стенки (Н), см	Длина внутренней окружности (L ₁), см	Длина завязок (L ₂), см	Ширина завязок, см
Шлем	от 30,0 до 42,0 с интервалом 1 см	От 52,0 до 62,0 с интервалом 1,0 см	От 49,0 до 75,0 с интервалом 1,0 см	От 4,0 до 8,0 интервалом 0,5 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

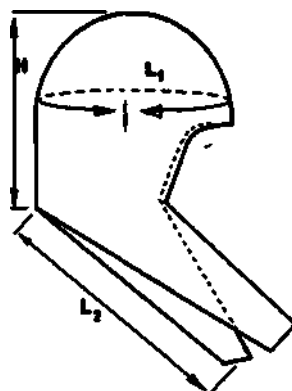


Таблица 11. Шапочка - бандана

Вариант исполнения / Модель	Высота стенки (А), см	Длина внутренней окружности (Д), см	Длина завязок (С), см/Ширина завязок, см	Высота отверстия (В), см	Диаметр доннышка (Е), см
Бандана	от 13,0 до 20,0 с интервалом 1 см	от 19,0 до 25,0 с интервалом 1,0 см	От 17,0 до 27,0 с интервалом 1,0 см От 4,0 до 7,0 интервалом 0,5 см	От 4,0 до 6,0 с интервалом 0,5 см	От 29,0 до 32,0 с интервалом 1,0 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

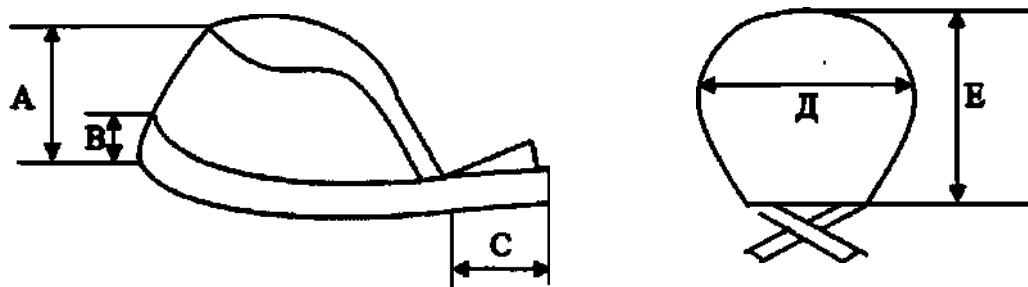


Таблица 12. Шапочка - косынка

Вариант исполнения / Модель	Длина (А), см	Ширина (В), см
Косынка	от 100,0 до 110,0 с интервалом 1,0	от 70,0 до 80,0 с интервалом 1,0 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

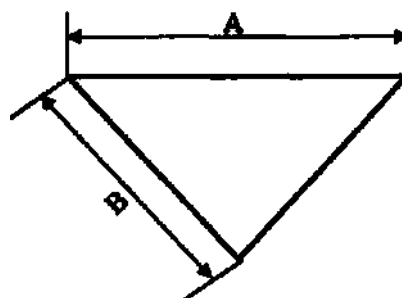



Таблица 13. Маска одноразовая (на резинках или на завязках)

Маска одноразовая (на резинках или на завязках)


Длина маски мм	Ширина маски (С), мм	Длина резинки (L2) / Ширина(диаметр) резинки	Длина завязки (L1)/Ширина завязки, мм
-------------------	----------------------	---	--

140	80	130мм±20мм/ от 0,2 до 0,9 см	Длина 380-400/ ширина 8-12 мм
145	95	130мм ±20мм / от 0,2 до 0,9 см	Длина 380-400/ ширина 8-12 мм
175	95	150мм ±20мм / от 0,2 до 0,9 см	Длина 380-400/ ширина 8-12 мм

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

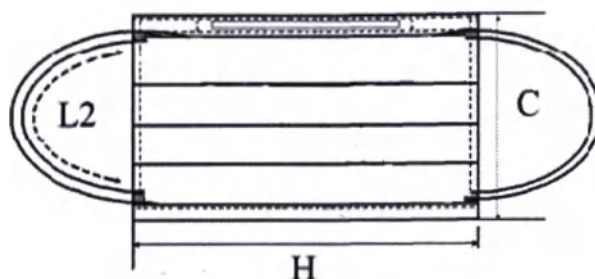

Маска одноразовая на резинках

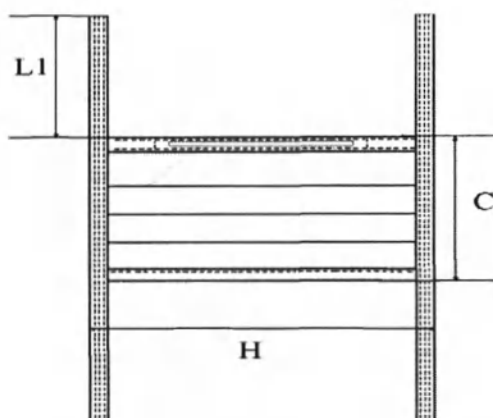

Маска одноразовая на завязках

Таблица 14 .Салфетка

Длина изделия (1), см	от 40,0 до 90,0 с интервалом 5,0 см
Ширина изделия (2), см	от 30,0 до 60,0 с интервалом 5,0 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

Таблица 15.

Перчатки хирургические										
Размеры перчаток	5,5	5,5	6	6,5	7 (S)	7,5	8 (M)	8,5	9 (L)	9 (XL)
Ширина (L), мм	70,0±4,0	72,0±4,0	77,0±5,0	83,0±5,0	89,0±5,0	95,0±5,0	102,0±6,0	108,0±6,0	114,0±6,0	116,0±6,0
Длина (A), мм, не менее	240,0	250,0	260,0	260,0	270,0	270,0	270,0	280,0	280,0	280,0
Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%										
Перчатки смотровые										
Размеры перчаток	XS(5-5,5)		S (6)		M (7)		L(8)		XL(9)	
Ширина ладони мм	≤80		80±10		95±10		110±10		≥110	
Длина (A), мм, менее	240,0±5,0		240,0±5,0		240,0±5,0		240,0±5,0		240,0±5,0	


Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%



Таблица 16. Комбинезон

Наименование показателя	
Длина изделия (А), (от шеи до голеностопного сустава) (Н1), см	От 140,0 до 190,0 с интервалом 5,0см
Длина переда от середины горловины до промежности (Н 2), см	От 65,0 до 90,0 с интервалом 1,0см
Длина по шаговому шву (Н 3), см	От 65,0 до 90,0 с интервалом 1,0см
Ширина переда на уровне глубины проймы (С 1), см	От 62,0 до 87,0 с интервалом 1,0см
Ширина спинки (С 2), см	От 65,0 до 90,0 с интервалом 1,0см
Ширина в талии (С 3), см	От 65,0 до 90,0 с интервалом 1,0см
Ширина внизу (С 4), см	От 30,0 до 38,0 с интервалом 1,0см
Длина рукава от высокой точки оката до низа (L1), см	От 60,0 до 88,0 с интервалом 1,0см
Высота стенки капюшона (Н4), (при наличии), см	От 35,0 до 45,0 с интервалом 0,5см
Длина резинки на капюшоне, см	От 30,0 до 40,0см
Ширина/диаметр резинки на капюшоне, см	от 0,2 до 0,9 см
Длина внутренней окружности капюшона (L2), (при наличии), см	От 48,0 до 59,0 с интервалом 0,5см
Длина липучки, при наличии, см	От 15,0 до 90,0 с интервалом 1,0см
Ширина липучки, при наличии, см	От 2,0 до 3,0 с интервалом 0,2см
Длина манжеты, при наличии, см	От 5,0 до 10,0 с интервалом 1,0см
Ширина манжеты, при наличии, см	От 5,0 до 7,0 интервалом 0,5см
Длина (общая) резинки на рукавах, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см
Длина (общая) резинки на брючине, при наличии, см	От 40,0 до 50,0 с интервалом 1,0см
Диаметр/ширин резинки на рукавах/брючине, при наличии, см	от 0,2 до 0,9 см

Допустимые отклонения фактических линейных размеров изделия от номинальных линейных размеров не должны превышать 5%

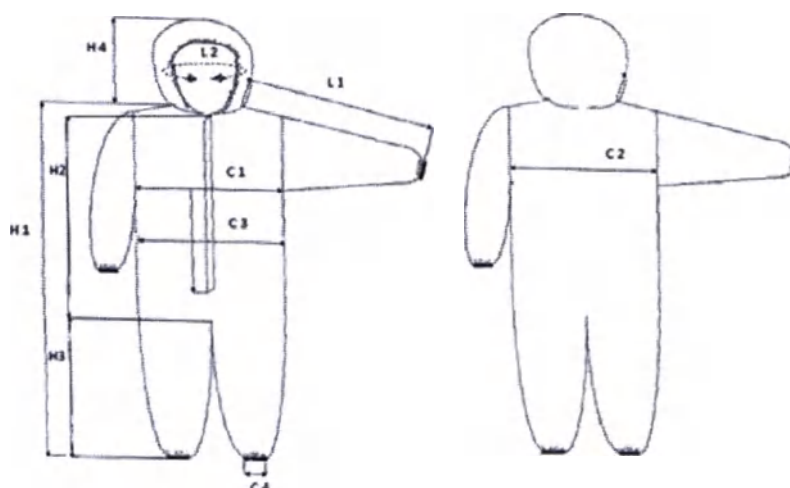

Изделия собственного производства, входящие в набор, должны изготавливаться из материалов, представленных в таблице 17.

Таблица 17.

Наименование материалов.	Нормативный документ и/или предприятие - изготовитель	Наименование изделий
1	2	3
Ламинированный Спанлейс, плотность 65 г/м ² .	Нетканые материалы из химических нитей, производства "Shangvu Wanril Non-Women Textiles Co, Ltd", Китай/ООО ТД "Нетканые технологии", Россия.	Халат, с усиленной защитной зоной (усиленная защитная зона) Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) Нарукавники Фартук Комбинезон Салфетка
Сантейс ((Santeys), голубого цвета, плотность 54, 74 г/м ² . Краситель: марка E50152 (цвет светло-голубой), производства фирмы "Lianhong", Китай.	Нетканые материалы из химических нитей, производства "Shangvu Wanril Non-Women Textiles Co, Ltd", Китай/ООО ТД "Нетканые технологии", Россия.	Халат, с усиленной защитной зоной (усиленная защитная зона) Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) Нарукавники Фартук
СС (нетканый двухслойный материал спанбонд-спанбонд, голубого цвета), плотность 20, 23, 25, 30, 40, 45, 60 г/м ² . Краситель: марка 63397-D2-300 (цвет светло-голубой), производства фирмы "Americhem Europe Limited", Великобритания.	Полотна нетканые термоскрепленные СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полиматиз", Россия или Нетканое полипропиленовое полотно по ТУ 8390-010-74582615-2009 ООО "Завод Эластик", Россия.	Халат, без (или с) усиленной защитной зоной Куртка Брюки Фартук Нарукавники Шапочка – шлем, или шапочка – колпак, Шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка - берет Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) Бахилы низкие Комбинезон
СМС (нетканый трехслойный материал спанбонд-мельтблаун-спанбонд, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 60 г/м ² . Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные по СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полиматиз", Россия или Нетканое полипропиленовое полотно по ТУ 8390-010-74582615-2009 ООО "Завод Эластик", Россия.	Халат, без (или с) усиленной защитной зоной Куртка Брюки Фартук Нарукавники Шапочка – шлем, или шапочка – колпак, Шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка - берет Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) Бахилы низкие Комбинезон
СММС (нетканый четырехслойный материал спанбонд-мельтблаун- мельтблаун-спанбонд, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 60 г/м ² . Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные по СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полиматиз", Россия.	Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) Бахилы низкие Комбинезон
Спанлейс (нетканый однослойный материал из штапельных вискозных и полиэфирных волокон), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 60 г/м ² .	Материал нетканый «Спанлейс» из штапельных вискозных и полиэфирных волокон по ТУ 13.95.10-006-56176857-2018, производства ООО «Авангард», Россия. или Нетканые материалы из химических нитей, производства фирмы "Shangvu Wanrui Non-Woven Textiles Co, Ltd." Китай/ООО ТД «Нетканые технологии», Россия	Халат, без (или с) усиленной защитной зоной Куртка Брюки Фартук Нарукавники Шапочка – шлем, или шапочка – колпак, Шапочка – косынка, или шапочка – бандана, или шапочка - берет Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) Бахилы низкие

Спанбонд ламинированный (нетканый двухслойный материал спанбонд-спанбонд ламинированный, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 60 г/м ² . Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные в том числе ламинированные по СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полиматиз", Россия.	Комбинезон Халат, с усиленной защитной зоной (усиленная защитная зона); Куртка; Брюки; Фартук; Нарукавники; Шапочка – шлем; Шапочка – колпак; Шапочка – косынка; Шапочка – бандана; Шапочка - берет; Бахилы высокие с двойной подошвой (или без); Бахилы низкие; Комбинезон
СММС (гидрофильный ламинированный, голубого цвета), плотность 20, 25, 30, 35, 42, 40, 45, 50, 55, 60 г/м ² . Краситель марка PP 52076994-ZT (цвет светло-голубой), производства фирмы "REMAFIN-BLUE" Италия.	Полотна нетканые термоскрепленные в том числе ламинированные по СТО 96891647-002-2009, производства АО "Полиматиз", Россия.	Халат, с усиленной защитной зоной (усиленная защитная зона); Куртка; Брюки; Фартук; Нарукавники; Шапочка – шлем; Шапочка – колпак; Шапочка – косынка; Шапочка – бандана; Шапочка - берет; Бахилы высокие с двойной подошвой (или без); Бахилы низкие; Комбинезон
Полиэтилен, плотность 60 мкм	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82, производства ЗАО "Производственно-Торговое Предприятие Киль", Россия	Халат с усиленной защитной зоной (усиленная защитная зона) Бахилы высокие с двойной подошвой (или без) Бахилы низкие Нарукавники Фартук
Тесьма (Резинка) (Состав: 70% полиэфир, 30% латекс)	Тесьма по ТУ 8151-001-59722763-2004, производства ООО «ФИ-ТЕКС» Россия	Элементы: халата - низ рукавов; куртка – низ рукавов; брюки – пояс или низ брючины; нарукавников – верхний и нижний срезы; бахилы высокие – верхний, средний срезы, на носочке изделия; бахилы низкие - верхний срез; береты – по краю изделия; комбинезон – низ рукавов, на спинке изделия, и низ брючины, на капюшоне; брюки– пояс брюк
Полотно трикотажное (Состав: нить полиэфирная 46%, пряжа смесовая 54%)	Полотно трикотажное по ГОСТ 25617-000, производства ООО «Эфрон», Россия	Манжеты: халат; куртка, нарукавники, комбинезон.
Застежка «Контакт» (Состав: 40% полиэстер и 60% нейлон)	Застежка «Контакт» по ГОСТ 63093, производства Фирма «Zhejiang Jianli Sticky Ribbon Co. Ltd», Китай	Застежка-липучка: халат, комби-незон

Покупные изделия, входящие в набор, должны соответствовать указанным в таблице 18.

Таблица 18.

Наименование покупных изделий	Нормативный документ и предприятие - изготовитель
1	2
Маска одноразовая на резинках или на завязках	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010, производства ООО «МАСКА», Россия, РУ № ФСР 2010/08512, (Маска медицинская из нетканого материала одноразовая трехслойная на резинках (SENSE с мб.) Одежда одноразовая медицинская по ТУ 9398-001-65578626-2010 варианты исполнения: - маска медицинская стандарт; - маска медицинская классик; - маска медицинская классик с рисунком; - маска медицинская классик элит; - маска медицинская хирургическая; - маска медицинская хирургическая против

	запотования, производства ООО «КИТ» Россия, РУ №ФСР 2010/09673 Маски медицинские из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 в трех исполнениях: однослойные, двухслойные, трехслойные, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» Россия, РУ №ФСР 2010/07908
Перчатки медицинские	Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-53733748-2008, производства ООО «Ардейл-Импэкс», Россия. РУ №ФСР 2008/03089, (Перчатки медицинские хирургические нестерильные текстурированные опудренные Super Max) Перчатки хирургические и смотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011: Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9, производства ООО «РусМедУпак», Россия, РУ № ФСР 2011/12244 Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED : 1. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED латексные (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - опудренные (белые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные хлорированные (желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие); - неопудренные с полимерным покрытием (белые, желтые, розовые, оранжевые, зеленые, голубые, синие). 2. Перчатки медицинские смотровые нестерильные SITEKMED нитриловые (размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10): - неопудренные хлорированные (белые, голубые, синие, фиолетовые, розовые, зеленые). - неопудренные с полимерным покрытием (белые, голубое, синие, фиолетовые, розовые, зеленые), производства Перусахаан Джита Азас Сдн.Бхд. Малайзия, РУ №ФСЗ 2011/11024

Материалы для изделий, входящих в набор, должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 19.

Таблица 19.

Наименование материала.	Поверхностная плотность, г/м ² не менее	Разрывная нагрузка, кгс. не менее				Водоупорность, мм в д. ст. не менее
		в сухом состоянии		во влажном состоянии		
		в продольном направлении	в поперечном направлении	в продольном направлении	в поперечном направлении	
1	2	3	4	5	6	7
1. Неламинированный нетканый материал (СС, СМС, СММС, Спанлейс)	20,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-
	23,0	3,0	2,0	2,5	1,8	-
	25,0	3,5	2,0	3,0	1,8	-
	30,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	35,0	4,0	2,5	3,5	2,0	-
	40,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	42,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	45,0	4,5	3,0	4,0	2,5	-
	50,0	5,0	3,5	4,5	3,0	-
	60,0	5,5	4,0	5,0	3,5	-
2. Ламинированный нетканый материал Сантейс (Santeys).	54,0	2,0	1,8	1,0	1,0	500
	74,0	2,5	2,0	1,5	1,2	500
3. Ламинированный нетканый материал (Спанлейс, Спанбонд, СММС).	20,0	4,0	2,5	3,5	2,0	500
	25,0	4,0	2,5	3,5	2,0	500
	30,0	4,5	2,5	3,5	2,0	500
	35,0	4,5	2,5	3,5	2,0	500
	40,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	42,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	45,0	5,0	3,5	4,5	3,0	500
	50,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500
	55,0	5,5	4,0	5,0	3,5	500
	60,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	65,0	6,0	4,5	5,5	4,0	1000
	4. Пленка полиэтиленовая	20,0	3,0	2,0	-	-

Набор может выпускаться из окрашенных или неокрашенных материалов. *Халат* с втачным рукавом на завязках или с вязанной трикотажной манжетой или собранным на резинке, с воротником или без него. Халат спереди цельнокроеный, а сзади фиксируется на завязки или на застежку – липучку. Рукава, разрез и низ халата не обработаны. Может иметь карман. Халат может быть целиком изготовлен из неламинированного нетканого материала, либо часть полочки ниже области груди и рукава могут быть выполнены из ламинированного нетканого материала или полиэтилена. *Куртка* с длинным или коротким цельнокроеным или втачным рукавом. Вырез горловины круглый или прямоугольный, или V-образный. Рукава, вырез горловины и низ куртки не обработаны. Куртка может быть изготовлена из неламинированного нетканого материала или из ламинированного нетканого материала. *Брюки* на уровне талии собраны на резинку или завязки. Низ брюк не обработан или на резинке. Брюки могут быть изготовлены из неламинированного нетканого материала или из ламинированного нетканого материала. *Фартук* фигурный, цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой или завязками, фиксирующей его на шее. Края фартука могут быть и обработаны, и не обработаны. Фартук может быть изготовлен из неламинированного нетканого материала или из ламинированного нетканого материала или полиэтилена. *Нарукавники* одношовными, собраны на резинке или с вязаными трикотажными манжетами. Края не обработаны. Нарукавники могут быть изготовлены из неламинированного нетканого материала или из ламинированного нетканого материала или полиэтилена. *Бахилы* (высокие) с двойной подошвой или без нее, собраны по верхнему краю на завязках или на резинку. Также могут быть одновременно и на завязках и резинке. Могут быть одновременно на трех резинках. Края не обработаны. Бахилы могут быть изготовлены из неламинированного нетканого материала или из ламинированного нетканого материала или полиэтилена. Бахилы низкие собраны по верхнему краю на резинку. Бахилы могут быть изготовлены из неламинированного нетканого материала или из ламинированного нетканого материала или полиэтилена. *Шапочка-шлем* состоит из стенки с доньшком и завязок, регулирующих размер шлема под подбородком. Края не обработаны. *Шапочка – колпак* состоит из стенки с доньшком и завязок, с завязками для соединения на затылке. *Шапочка – берет* состоит из круга, и с мягкой двухрядной резинкой по кругу. *Шапочка – бандана* состоит из стенки с доньшком и завязок, регулирующих размер банданы на затылке. *Шапочка косынка* треугольной формы. Края не обработаны. Изделия могут быть изготовлены из неламинированного нетканого материала или из ламинированного нетканого материала. *Маска одноразовая* с резинками или завязками, с фильтром, с фиксатором или без него. *Салфетка* прямоугольной формы. Края не обработаны. Салфетка изготовлена из ламинированного нетканого материала. *Перчатки медицинские* предназначены для защиты рук медицинских работников. *Комбинезон* с длинным втачным рукавом, который оканчивается манжетой трикотажной или резинкой. Вырез горловины округлый. Комбинезон может иметь притачанный капюшон с резинкой или кулисой по краю. На передней полочке - застежка на молнию. Комбинезон может на уровне талии фиксироваться резинкой или завязками. Комбинезон может быть изготовлен из неламинированного нетканого материала или ламинированного нетканого материала. Соединение деталей изделий должно осуществляться нитками полиэстер по ТУ 8147-045-00319629-2007 - 50/2,40/2, 40/3, 100лш, 170лш, 270лш, производства ОАО "ПНК им. С.м. Кирова" либо ультразвуковой либо термической сваркой (ширина шва 1 - 10 мм). Прочность шва должна быть не менее 18 Н.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Потенциальные потребители: высококвалифицированный медицинский персонал, младший медицинский персонал.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор одежды имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовым мусором.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Камелот Медикал» (ООО «Камелот Медикал»)

Юридический адрес: 420108, Россия, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 48, пом. 10

Тел: (843) 590-99-40, 590-99-45

E-mail. camelotmedical@bk.ru

Адрес места производства: ООО «Камелот Медикал», 420108, Россия, г. Казань, ул. Ирек д. 1 часть пом. 28, часть пом. 29.

Внимание! О нежелательных событиях, которые имеют признаки неблагоприятного события (инцидента) рекомендуется направлять в адрес производителя ООО «Камелот Медикал».

Сшито и заверено печатью 32

(Тригун) лист а

ДИРЕКТОР ООО «КАМЕЛОТ
МЕДИКАЛ»

Трофимова Ю.М.

