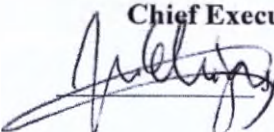


Approved by
Chief Executive Officer
Osstell AB
Jonas Ehinger

Göteborg, January 27, 2022

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Устройство портативное для неинвазивного измерения стабильности
денальных имплантатов **Osstell Beacon**

производства
Osstell AB (Осстелл АБ), Швеция.



NOTARIUS PUBLICUS I GÖTEBORG

I, the undersigned, AXEL WEIBULL, Notary Public of Göteborg, Sweden,
do hereby certify

that **Kurt Jonas Ehinger,**
has personally signed this document,

that according to an electronic Certificate of Registration issued by the Swedish
Companies Registration Office, dated the 27th of January 2022, he is the managing
director of the Swedish company **Osstell AB**— with Reg. No. **556612-4938**, and

that according to the Swedish Companies Act, a managing director is entitled to sign for and
on behalf of a company on issues regarding the day-to-day management of the company.



Göteborg, this 27th day of January 2022



Axel Weibull
Drottninggatan 38 / Box 11911, 404 39 Göteborg, Tel: 031-7991090, e-mail: notarius.publicus@lindahl.se

Exp. No: 501

Osstell Beacon
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



osstell.com

Добро пожаловать

Поздравляем с приобретением нового изделия «Устройство портативное для неинвазивного измерения стабильности дентальных имплантатов Osstell Beacon» (далее Osstell Beacon, прибор). Перед началом использования Osstell Beacon следует полностью прочесть данное руководство.

Содержание

1) Содержание	2
2) Особые указания и меры предосторожности	3
3) Целевое назначение	3
4) Показания к применению	3
5) Описание	3
6) Предупреждающие символы	4
7) Перед началом работы	5
8) Правила эксплуатации прибора Osstell Beacon	5
9) Приспособление Osstell TestPeg	5
10) Штифт SmartPeg	6
11) Как проводить измерения	6
12) Как проводить измерения на абатменте	7
13) Интерпретация результата	7
14) Передача данных на Osstell Connect	8
15) Очистка и обслуживание	8
16) Технические данные	9
17) Руководство по устранению неполадок	10
18) Сервис и поддержка	11
19) Отходы и утилизация	11

2) Особые указания и меры предосторожности

Особые указания:

- Перед эксплуатацией Osstell Beacon следует прочесть инструкцию полностью.
- Osstell Beacon излучает переменное магнитное поле, которое может влиять на работу кардиостимулятора! Прибор следует держать подальше от имплантированных электронных устройств. Не следует размещать прибор непосредственно на теле пациента.
- При использовании Osstell Beacon на пациентах необходимо использовать прозрачную защитную насадку. В разделе 11 приведены рекомендуемые виды насадок, а в разделе 15 - рекомендуемые способы очистки.
- Прибор не предназначен для стерилизации автоклавированием.
- Держатель Osstell SmartPeg Mount перед использованием необходимо стерилизовать.
- Во время запуска на приборе мигает красно-желто-зеленый световой индикатор - это проверка его функциональности. Если при этом какой-то один или все цвета не появляются, прибором пользоваться нельзя. Следует обратиться к местному торговому представителю или дистрибьютору за дальнейшими инструкциями.
- Измерения следует всегда выполнять в двух направлениях: буккально-лингвальном и мезиально-дистальном, в соответствии с указаниями прибора. Это необходимо для определения минимального значения стабильности имплантата.
- Штифты одноразовые стерильные для измерения стабильности дентальных имплантатов SmartPeg (далее штифт SmartPeg) являются одноразовыми и должны использоваться только для измерений (одного или нескольких) в течение одного сеанса, только для одного пациента (во избежание перекрестного инфицирования). Повторное использование может привести к получению неверных результатов вследствие износа мягкой алюминиевой резьбы штифта SmartPeg.
- Прибор нельзя подвергать воздействию очень высоких температур (например, оставлять его на приборной панели автомобиля в теплый солнечный день).

- Прибор Osstell Beacon не защищен от проникновения жидкостей (например, воды) через разъем USB (класс защиты IP20).
- Кабель питания от сети или USB-кабель, используемые для зарядки, не должны попадать в руки пациента.

Меры предосторожности:

- Во избежание помех другому оборудованию прибор следует размещать в удалении от электронных устройств.
- При чистке прибора необходимо использовать только очистители, указанные в разделе 15.
- Прибор запрещается использовать в присутствии взрывоопасных или легковоспламеняющихся материалов.
- Информация о допустимых и совместимых аксессуарах приведена в разделах 4, 5 и 10.

3) Целевое назначение

Устройство Osstell Beacon предназначено для использования в качестве анализатора стабильности зубных имплантатов.

4) Показания к применению

Устройство Osstell Beacon используется для измерения стабильности имплантатов в полости рта и черепно-лицевой области.

Условия

Размещаемые операционным путем имплантаты или абатменты, при которых есть место для размещения совместимого штифта SmartPeg.

Основания для применения

Устройство Osstell Beacon может служить источником данных, значимых для оценки стабильности имплантата, и может использоваться как часть общей программы оценки лечения. Окончательные решения по обработке имплантатов принимает лечащий врач.

Противопоказания

Использование устройства Osstell Beacon противопоказано при наличии систем имплантатов, к которым из-за механической несовместимости невозможно прикрепить штифт SmartPeg. Дополнительная информация о штифтах SmartPeg приведена в разделе 10. Прибор Osstell Beacon запрещается использовать с штифтами, не допущенными к совместному применению компанией Osstell. Устройство Osstell Beacon нельзя использовать в случаях, когда штифт SmartPeg невозможно прикрепить из-за нехватки места или если размещению модуля препятствуют другие искусственные или естественные структуры.

Возможные побочные эффекты

При соблюдении мер предосторожности и эксплуатационной документации, побочные действия отсутствуют.

5) Описание

Osstell Beacon - портативный прибор, использующий неинвазивный метод резонансного частотного анализа. В системе также используется штифт SmartPeg, прикрепляемый к зубному имплантату или абатменту посредством встроенного винта. Штифт SmartPeg реагирует на магнитный импульс, испускаемый наконечником прибора.

По величине ответного сигнала рассчитывается резонансная частота, по которой и определяется стабильность имплантата. Результаты отображаются на приборе в виде коэффициента стабильности имплантата (КСИ). КСИ варьируется от 1 до 100. Он является единицей измерения стабильности имплантата и рассчитывается по значению резонансной частоты, полученному от штифта SmartPeg. Чем больше число, тем выше стабильность. Программное обеспечение прибора можно обновить через USB-кабель Osstell.

В систему Osstell Beacon входят следующие элементы:

- 1 Устройство Osstell Beacon
- 2 Кабель Osstell USB
- 3 Держатель Osstell SmartPeg Mount
- 4 Приспособление Osstell TestPeg
- 5 Ключ (адаптер) Osstell Key
- 6 Руководство по эксплуатации



6) Предупреждающие символы

	Внимание!
	Следуйте инструкции по эксплуатации
	Сверьтесь с инструкцией по эксплуатации
	См. раздел 2) Особые указания и меры предосторожности
	Рабочая часть типа BF
	Производитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Литий-ионный аккумулятор.
	Знак CE с идентификационным номером аккредитованного органа сертификации.
	Данное электронное изделие одобрено Федеральной комиссией по связи (FCC) Идентификатор FCC: QOQBLE112 IC: 5123A-BGTBLE112
	Неионизирующее электромагнитное излучение
	Не подлежит стерилизации
	Ограничение по температурному диапазону
	Ограничение по влажности
	Ограничение по атмосферному давлению
	Прибор защищен от попадания внутрь твердых посторонних предметов размером 12,5 мм и более. Влагозащита отсутствует.
	Использовать до
	Код партии
	Стерилизовано облучением
	Только для рынка США: Использовать только по предписанию врача. Федеральный закон США разрешает продажу данного устройства только лицензированным практикующим врачам или по заказу лицензированного практикующего врача.
	Каталожный номер
	Не использовать повторно

7) Перед началом работы

Прибор Osstell Beacon поставляется с завода в «транспортновочном» режиме - с отключенным встроенным датчиком движения. Чтобы отключить транспортновочный режим и начать зарядку, необходимо подключить меньший разъем USB-кабеля Osstell к широкому концу прибора. Большой разъем USB-кабеля подключается к стандартному разъему USB ПК, ноутбука или зарядного устройства. Прибор Osstell Beacon запустится и перейдет в режим зарядки. Прибор Osstell Beacon следует заряжать не менее 3 часов или до тех пор, пока индикатор не покажет полный заряд. Затем USB-кабель Osstell следует отключить.

Примечание: Во время зарядки прибора проводить измерения КСИ невозможно.

8) Правила эксплуатации прибора Osstell Beacon

Прибор Osstell Beacon активируется встроенным датчиком движения. Как только датчик обнаруживает движение, индикатор Osstell Beacon начнет мигать красно-желто-зеленым, затем на нижнем дисплее отобразится состояние аккумулятора, после этого прибор будет готов к проведению измерения в направлении BL (буккально-лингвальном), отображаемом на верхнем дисплее.

Osstell Beacon начинает измерение, оповещая об этом звуковым сигналом, когда его встроенный магнитный детектор фиксирует рядом присутствие штифта Smartpeg или приспособления Osstell TestPeg, обнаруживая магнит в верхней части этого штифта. Данные измерения отображаются на верхнем дисплее в сочетании с цветной световой индикацией под наконечником прибора.

Красная, желтая и зеленая индикация обозначают соответственно низкую, среднюю или высокую стабильность имплантата по шкале КСИ. Дополнительную информацию можно найти на сайте osstell.com/clinical-guidelines/. После 60 секунд бездействия Osstell Beacon автоматически выключается.

9) Приспособление Osstell TestPeg

Приспособление Osstell TestPeg может использоваться как для тестирования системы, так и для обучения работе с ней.

Приспособление Osstell TestPeg следует поместить на стол или взять в руку. Активировать прибор Osstell Beacon, разместив его таким образом, чтобы наконечник прибора оказался на расстоянии 3-5 мм от верхней части Приспособления Osstell TestPeg. Osstell Beacon должен начать измерение и выдать значение КСИ 55 +/- 2.

10) Штифт SmartPeg

Штифт SmartPeg поставляется с соединениями различной геометрии, соответствующими всем основным типам имплантатов, представленным на рынке. Подходящий штифт SmartPeg можно подобрать на сайте osstell.com/smartpegguide. Штифты SmartPeg™ являются одноразовыми и должны использоваться только для измерений (одного или нескольких) в течение одного сеанса, только для одного пациента (во избежание перекрестного инфицирования). Повторное использование может привести к получению неверных результатов вследствие износа мягкой алюминиевой резьбы зонда SmartPeg.

11) Как проводить измерения

Перед использованием устройства Osstell Beacon на пациенте на устройство необходимо надеть чехол одноразовый. Чехол одноразовый помогает предотвратить перекрестное инфицирование и предотвращает прилипание стоматологического композитного материала к поверхности наконечника и корпуса прибора, а также его обесцвечивание и разрушение вследствие воздействия очищающих растворов.

Примечание:

- Чехол одноразовый должен использоваться только один раз.
- После окончания приема каждого пациента использованные одноразовые чехлы утилизируются вместе со стандартными отходами.
- Прибор нельзя надолго оставлять в чехле одноразовом.
- Ниже приведены рекомендуемые чехлы одноразовые (должны быть зарегистрированы на территории РФ)
TIDishield, арт. №: 21021, арт. №: 20987. www.tidiproducs.com
Omnia: 32.Z0056.00 (стерильная) 30.Z0056.00 (нестерильная)
PremiumPlus: 123, Small short 123, Small

Другие виды рекомендуемых чехлов одноразовых можно найти на сайте:

osstell.com/get-started-beacon

- Прибор Osstell Beacon необходимо очищать и дезинфицировать соответствующими чистящими и/или дезинфицирующими средствами после каждого пациента. См. Раздел 15) Чистка и уход подходящими средствами. Первое измерение выполняется сразу после установки имплантата, чтобы получить исходные данные для дальнейших измерений в ходе процесса заживления. Перед финальной реставрацией проводится еще одно измерение, позволяющее отследить тенденции изменения стабильности имплантата.

Рекомендуется проводить измерения и в буккально-лингвальном, и в мезиально-дистальном направлении, чтобы найти наименьшее значение стабильности. Поэтому Osstell Beacon предлагает пользователю выполнить измерения в обоих этих направлениях.

1. Активировать прибор Osstell Beacon, подняв его. Прибор запустится и после отображения состояния батареи будет готов к измерению в направлении BL (буккально-лингвальном), которое отображается на верхнем дисплее. Там же отображается оптимальный угол наклона наконечника прибора относительно штифта SmartPeg.
2. Надеть на прибор Osstell Beacon чехол одноразовый См. рис. 1.
3. Поместить штифт SmartPeg в держатель Osstell SmartPeg Mount. Штифт SmartPeg обладает магнитными свойствами, благодаря чему зафиксируется в держателе Osstell SmartPeg Mount. См. рис. 2. Прикрепить штифт SmartPeg к имплантату или абатменту, вручную прикрутив держатель Osstell SmartPeg Mount с усилием около 4-6 Нсм.

Не стоит затягивать слишком туго, так как при этом можно повредить резьбу SmartPeg.

4. Наконечник прибора следует удерживать рядом (на расстоянии 3-5 мм) с верхней частью SmartPeg, однако не касаясь его. Звуковой сигнал отмечает начало измерения, результаты измерения отображаются на верхнем дисплее плюс цветной световой индикацией под наконечником прибора. Чтобы увидеть значение КСИ и цветную индикацию, прибор следует вынуть изо рта пациента.

Результаты измерения КСИ отображаются на верхнем дисплее в течение нескольких секунд, после чего прибор переключается, показывая готовность к проведению измерения в мезиально-дистальном направлении. См. рис. 3 и 4. **Примечание:** Не следует подносить наконечник прибора к SmartPeg, пока верхний дисплей не переключится на следующее направление.

5. Сверху измерения не производятся. См. рис. 5.
6. Когда прибор Osstell Beacon снова готов к выполнению измерения в направлении BL (буккально-лингвальном),

последовательность измерения снова начинается с п. 4. См. рис. 3.

7. После выполнения всех измерений снять SmartPeg за держатель Osstell SmartPeg Mount.
8. Прибор автоматически выключается через 60 секунд неподвижности.



12) Как проводить измерения на абатменте

Если измерение выполняется на абатменте или на имплантате со "встроенным" абатментом, значение КСИ будет ниже, чем когда измерение выполняется непосредственно на имплантате. Это происходит из-за разницы в высоте над уровнем кости. Чтобы выяснить разницу КСИ с измерением, выполненным на уровне имплантата, необходимо провести измерение на имплантате до прикрепления абатмента, а затем повторное измерение на абатменте.

13) Интерпретация результатов

Стабильность имплантата

Стабильность имплантата в разных направлениях может различаться. Ее уровень зависит от конфигурации окружающей кости. Часто выделяется направление, в котором значение стабильности минимально, и направление, где оно максимально. Эти два направления чаще всего перпендикулярны друг другу.

Для выявления минимальной стабильности (самое низкое значение КСИ) рекомендуется проводить измерения в двух разных направлениях. В большинстве случаев минимальная стабильность наблюдается в буккально-лингвальном направлении. Максимальная стабильность чаще всего обнаруживается в мезиально-дистальном направлении.

Значение КСИ

Измерения КСИ должны проводиться при установке имплантата и до того, как на имплантат будет подана нагрузка или присоединен абатмент. После каждого измерения значения КСИ записываются и используются в качестве исходного для следующего измерения. Изменения значений КСИ отражают изменение стабильности имплантата. В целом увеличение значений КСИ за период от одного момента измерения до следующего указывает на прогресс в стабилизации имплантата, тогда как уменьшение значений КСИ указывает на потерю стабильности и возможное отторжение имплантата. Неизменное значение КСИ говорит об отсутствии изменений в стабильности.

14) Передача данных на Osstell Connect*

Osstell Connect (osstellconnect.com) представляет собой онлайн-инструмент для статистического анализа, дающий также возможность оценить полученные результаты измерения в сравнении с оценками по всей базе данных Osstell Connect. Прибор Osstell Beacon можно подключить через интернет к Osstell Connect для сбора данных.

Чтобы подключиться к Osstell Connect для передачи данных, необходимо зарегистрировать свой прибор Osstell Beacon. Серийный номер для регистрации указан на задней панели прибора. Более подробную информацию о регистрации и особенностях подключения к Osstell Connect можно найти на сайте osstell.com/get-started-beacon

**не поставляется для рынка России*

15) Очистка и обслуживание

Перед каждым использованием следует протирать всю поверхность прибора Osstell Beacon марлей или мягкой тканью, смоченной подходящим (см. список ниже) дезинфицирующим средством.

Примечание: Прибор Osstell Beacon не предназначен для стерилизации автоклавированием.

Наконечник и всю поверхность прибора следует регулярно осматривать на предмет возможных трещин и загрязнений.

Подходящие чистящие средства:

Изопропиловый спирт

Очищающие средства на основе этилового спирта

Запрещено использовать:

Сильные щелочные моющие средства любого типа, включая мыло для рук и моющее средство для посуды

Отбеливатели

Очищающие средства на основе перекиси водорода

Абразивные чистящие средства

Очищающие средства на основе ацетона или углеводородных соединений

МЭК (метилэтилкетон)

Birex

Глютаральдегид

Очищающие средства на основе четвертичных аммоний-хлоридных солей

Прибор не требует регулярного обслуживания. В случае неисправности прибора следует обратиться к местному торговому представителю или дистрибьютору для получения дальнейших инструкций.

Штифты SmartPeg: Поставляются стерильными. Штифты SmartPeg™ являются одноразовыми и должны использоваться только для измерений (одного или нескольких) в течение одного сеанса, только для одного пациента (во избежание перекрестного инфицирования).

Приспособление Osstell TestPeg: Не используются внутри рта пациента, поэтому не требуют стерилизации.

Держатель Osstell SmartPeg Mount следует очищать и стерилизовать перед каждым использованием в соответствии с нижеприведенными инструкциями.

Держатель Osstell SmartPeg Mount: Стерилизуется автоклавированием в соответствии с рекомендованным методом стерилизации, прошедшим валидацию обеспечения нужного уровня стерильности (SAL), в соответствии с ISO 17665-1 и ISO 17664. Для стерилизации крепление SmartPeg Mount помещается в подходящую упаковку.*

Стерилизация		
Метод:	Температура стерилизации	Время стерилизации
Форвакуум	132° C (270° F)	4 минуты
Форвакуум	134° C (273° F)	3 минуты
Гравитационный стерилизатор	134° C (273° F)	10 минут

Предупреждение: температура должна быть не выше 135°C (275°F). Время сушки: 30 минут

Тщательно осмотреть Держатель Osstell SmartPeg Mount на предмет признаков повреждения или износа. Вручную вымыть нейтральным моющим средством. Ополоснуть и высушить; затем тщательно осмотреть держатель Osstell SmartPeg Mount на предмет признаков повреждения или износа. Стерилизация держателя Osstell SmartPeg Mount осуществляется в соответствии с инструкциями производителя автоклава. Запрещается мыть его в посудомоечной машине. Стерильные детали следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли.**

** Помещайте медицинское изделие держатель Osstell SmartPeg Mount в упаковку для стерилизации, отвечающую следующим требованиям.*

>> Упаковка для стерилизации должна отвечать действующим нормативам по качеству и способу применения и быть пригодной для используемого метода стерилизации.

>> Упаковка для стерилизации должна иметь достаточные размеры для стерилизуемого продукта.

>> Укомплектованная упаковка для стерилизации не должна находиться под механическим напряжением.

***>> Храните стерилизованную продукцию необходимо в упаковке, в которой проводилась стерилизация, в защищенном от пыли и сухом месте.*

>> Срок хранения стерилизованной продукции зависит от условий хранения и типа упаковки.

16) Технические данные

Техническое описание

Прибор Osstell Beacon снабжен маркировкой CE в соответствии с европейским стандартом MDD (класс IIa, встроенный источник питания, тип BF. Устройство не относится к классу AP или APG, не защищено от попадания воды). Устройство Osstell Beacon соответствует применимым частям МЭК 60601-1/ANSI/AAMI ES 60601-1.

Используемые символы соответствуют европейскому стандарту EN 60601-1 и стандартам ISO 9687 и 15223.

Примечания по электромагнитной совместимости (ЭМС) К медицинскому электрооборудованию предъявляются особые требования по безопасности и ЭМС, поэтому оно должно вводиться в эксплуатацию в соответствии с нижеприведенными примечаниями по ЭМС:

Компания Osstell гарантирует соответствие прибора требованиям ЭМС только при его использовании с оригинальными аксессуарами и запчастями. Использование других аксессуаров / других запчастей может привести к повышению уровня излучения электромагнитных помех либо к снижению устойчивости к электромагнитным помехам.

Прибор Osstell Beacon оснащен блоком связи Bluetooth. Идентификатор FCC: QOQBLE112, IC5123A-BGTBLE112

Аккумулятор

Прибор оснащен перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Для зарядки прибора используется USB-кабель Osstell, подключенный к стандартному разъему USB 2.0 или 3.0. Состояние аккумулятора и процесс зарядки отображается на нижнем дисплее символом батареи, поделенным на 4 уровня: 100% (полностью заряжен), 75%, 50% и менее 25%. При уровне заряда менее 10% прибор Osstell Beacon отображает вместо символа батареи сигнал о том, что требуется подзарядка. Примечание: Во время зарядки прибора проводить измерения КСИ невозможно.

Питание, вес и габариты:

Литий-ионный аккумулятор:	3,7 В постоянного тока
Зарядка:	USB-кабель (USB тип C / USB тип A), подключенный к стандартному разъему USB 2.0 или 3.0 (тип A)
Габариты прибора:	210 x 35 x 25 мм
Габариты упаковки:	272 x 140,2 x 74,60 мм
Масса брутто:	0,75 кг

Условия при транспортировке:

Температура:	от -40° С до +70° С
Относительная влажность:	от 10% до 95%
Давление:	от 500 гПа до 1060 гПа

Условия при эксплуатации:

Температура:	от +10° С до +35° С
Относительная влажность:	от 30% до 75%
Давление:	от 700 гПа до 1060 гПа
Класс IP:	IP20

17) Руководство по устранению неполадок

Результат измерения отсутствует или не попадает в ожидаемый диапазон

Повторно используемый штифт SmartPeg.

штифты SmartPeg™ являются одноразовыми и должны использоваться только для измерений (одного или нескольких) в течение одного сеанса, только для одного пациента. Повторное использование может привести к получению неверных результатов вследствие износа мягкой алюминиевой резьбы штифта SmartPeg.

Неправильный тип штифта SmartPeg, не подходящий для конкретного имплантата.

См. список рекомендуемых типов штифтов SmartPeg, (см. Приложение)

Наличие костной или мягкой ткани между штифтом SmartPeg и имплантатом.

Перед прикреплении штифта SmartPeg следует обязательно очистить протезное соединение имплантата.

Электромагнитная интерференция.

Убрать источник электромагнитных помех.

Наконечник прибора находится слишком далеко от штифта SmartPeg.

Разместить наконечник прибора на расстоянии 3-5 мм от SmartPeg.

Прибор не распознает штифт SmartPeg, поэтому результаты измерения отсутствуют.

Сделать прибором круговое движение с диаметром 2 см, затем повторить измерение.

Прибор не заряжается при подключении USB-кабеля

Используется неправильный USB-кабель.

Следует использовать только USB-кабель Osstell, подключенный к стандартному USB-разъему.

Прибор не запускается

Аккумулятор разряжен.

Зарядить прибор Osstell Beacon.

Прибор находится в транспортировочном режиме.

Инструкцию по выводу прибора из транспортировочного режима см. в разделе 7.

При запуске прибор отображает символ



Самотестирование завершилось неудачно

Следует обратиться к местному торговому представителю или дистрибьютору за дальнейшими инструкциями.

При запуске прибора отсутствует мигание индикатора красно-зелено-желтым цветом

Во время запуска на приборе мигает красно-желто-зеленый световой индикатор - это проверка его функциональности. Если при этом какой-то один или все цвета не появляются, прибором

пользоваться нельзя. Следует обратиться к местному торговому представителю или дистрибьютору за дальнейшими инструкциями.

Сложно провести измерение точно в заданном направлении

Нет места - например, мешают соседние зубы.

Попробовать провести измерение немного под другим углом.

Сложности с закреплением штифта SmartPeg

Неправильный тип штифта SmartPeg

Убедиться, что данный штифт SmartPeg совместим с используемой системой имплантатов.

18) Сервис и поддержка

В случае неисправности прибора следует обратиться к местному торговому представителю или дистрибьютору для получения дальнейших инструкций.

19) Отходы и утилизация

Прибор Osstell Beacon подлежит переработке как электрооборудование. Штифты SmartPeg подлежат переработке как металл. Аккумулятор следует по возможности утилизировать в разряженном состоянии, чтобы избежать выделения тепла вследствие случайного короткого замыкания.

Утилизация производится в соответствии с действующими местными и государственными законами, директивами, стандартами и предписаниями.

- Отходы электрооборудования
- Аксессуары и запчасти
- Упаковка

Производитель

Ostell AB (Остелл АБ)
Stampgatan 14, 411 01 GÖTEBORG, Sweden (Стампгата-
н 14, 411 01 Гётеборг, Швеция)
Телефон: +46 31 340 82 50 | info@ostell.com
www.ostell.com

CE 0402

Уполномоченный представитель производителя

ООО «ВестМед»
Россия, 121087, г. Москва, Вн.тер.г.
Муниципальный округ, Филевский парк, ул.
Барклай, д. 6, стр. 5, этаж 6, пом./офис 233/632
Телефон: +7 (499) 993-01-43
westmed@westmed.msk.ru

Регистрация по каталогу изделий Ostell
Eurasia

Устройство портативное для неинвазивного измерения стабильности дентальных имплантатов Osstell Beacon, в составе:

1. Устройство Osstell Beacon
2. Кабель Osstell USB
3. Держатель Osstell SmartPeg Mount не более 5 шт. (при необходимости)
4. Приспособление Osstell TestPeg
5. Ключ (адаптер) Osstell Key не более 5 шт. (при необходимости)
6. Штифт одноразовый стерильный для измерения стабильности дентальных имплантатов SmartPeg (при необходимости), в вариантах исполнения:
 - 6.1 SmartPeg Type 4 - (1уп./5шт.).
 - 6.2 SmartPeg Type 1 - (1уп./5шт.).
 - 6.3 SmartPeg Type 2 - (1уп./5шт.).
 - 6.4 SmartPeg Type 3 - (1уп./5шт.).
 - 6.5 SmartPeg Type 12 - (1уп./5шт.).
 - 6.6 SmartPeg Type 13 - (1уп./5шт.).
 - 6.7 SmartPeg Type A3 - (1уп./5шт.).
 - 6.8 SmartPeg Type 8 - (1уп./5шт.).
 - 6.9 SmartPeg Type 9 - (1уп./5шт.).
 - 6.10 SmartPeg Type 10 - (1уп./5шт.).
 - 6.11 SmartPeg Type 11 - (1уп./5шт.).
 - 6.12 SmartPeg Type 14 - (1уп./5шт.).
 - 6.13 SmartPeg Type 5 - (1уп./5шт.).
 - 6.14 SmartPeg Type 6 - (1уп./5шт.).
 - 6.15 SmartPeg Type 7 - (1уп./5шт.).
 - 6.16 SmartPeg Type 15 - (1уп./5шт.).
 - 6.17 SmartPeg Type 16 - (1уп./5шт.).
 - 6.18 SmartPeg Type 17 - (1уп./5шт.).
 - 6.19 SmartPeg Type 18 - (1уп./5шт.).
 - 6.20 SmartPeg Type 21 - (1уп./5шт.).
 - 6.21 SmartPeg Type 22 - (1уп./5шт.).
 - 6.22 SmartPeg Type 23 - (1уп./5шт.).
 - 6.23 SmartPeg Type 24 - (1уп./5шт.).
 - 6.24 SmartPeg Type 25 - (1уп./5шт.).
 - 6.25 SmartPeg Type 26 - (1уп./5шт.).
 - 6.26 SmartPeg Type 27 - (1уп./5шт.).
 - 6.27 SmartPeg Type 28 - (1уп./5шт.).
 - 6.28 SmartPeg Type 30 - (1уп./5шт.).
 - 6.29 SmartPeg Type 32 - (1уп./5шт.).
 - 6.30 SmartPeg Type 33 - (1уп./5шт.).
 - 6.31 SmartPeg Type 34 - (1уп./5шт.).
 - 6.32 SmartPeg Type 35 - (1уп./5шт.).
 - 6.33 SmartPeg Type 36 - (1уп./5шт.).
 - 6.34 SmartPeg Type 37 - (1уп./5шт.).
 - 6.35 SmartPeg Type 38 - (1уп./5шт.).


- 6.36 SmartPeg Type 40 - (1уп./5шт.).
 - 6.37 SmartPeg Type 44 - (1уп./5шт.).
 - 6.38 SmartPeg Type 45 - (1уп./5шт.).
 - 6.39 SmartPeg Type 46 - (1уп./5шт.).
 - 6.40 SmartPeg Type 47 - (1уп./5шт.).
 - 6.41 SmartPeg Type 48 - (1уп./5шт.).
 - 6.42 SmartPeg Type 49 - (1уп./5шт.).
 - 6.43 SmartPeg Type 50 - (1уп./5шт.).
 - 6.44 SmartPeg Type 51 - (1уп./5шт.).
 - 6.45 SmartPeg Type 52 - (1уп./5шт.).
 - 6.46 SmartPeg Type 53 - (1уп./5шт.).
 - 6.47 SmartPeg Type 54 - (1уп./5шт.).
 - 6.48 SmartPeg Type 55 - (1уп./5шт.).
 - 6.49 SmartPeg Type 57 - (1уп./5шт.).
 - 6.50 SmartPeg Type 58 - (1уп./5шт.).
 - 6.51 SmartPeg Type 60 - (1уп./5шт.).
 - 6.52 SmartPeg Type 61 - (1уп./5шт.).
 - 6.53 SmartPeg Type 62 - (1уп./5шт.).
 - 6.54 SmartPeg Type 63 - (1уп./5шт.).
 - 6.55 SmartPeg Type 65 - (1уп./5шт.).
 - 6.56 SmartPeg Type 66 - (1уп./5шт.).
 - 6.57 SmartPeg Type 68 - (1уп./5шт.).
 - 6.58 SmartPeg Type 69 (1уп./5шт.).
 - 6.59 SmartPeg Type 73 - (1уп./5шт.).
 - 6.60 SmartPeg Type 74 - (1уп./5шт.).
 - 6.61 SmartPeg Type 75 - (1уп./5шт.).
 - 6.62 SmartPeg Type 76 (1уп./5шт.).
 - 6.63 SmartPeg Type 78 (1уп./5шт.).
 - 6.64 SmartPeg Type 79 (1уп./5шт.).
 - 6.65 SmartPeg Type 80 (1уп./5шт.).
 - 6.66 SmartPeg Type 81 (1уп./5шт.).
 - 6.67 SmartPeg Type 82 (1уп./5шт.).
 - 6.68 SmartPeg Type 83 (1уп./5шт.).
 - 6.69 SmartPeg Type 84 (1уп./5шт.).
 - 6.70 SmartPeg Type 85 (1уп./5шт.).
 - 6.71 SmartPeg Type 86 (1уп./5шт.).
 - 6.72 SmartPeg Type 88 (1уп./5шт.).
 - 6.73 SmartPeg Type 89 (1уп./5шт.).
 - 6.74 SmartPeg Type 90 (1уп./5шт.).
 - 6.75 SmartPeg Type 91 (1уп./5шт.).
 - 6.76 SmartPeg Type 92 (1уп./5шт.).
 - 6.77 SmartPeg Type 93 (1уп./5шт.).
 - 6.78 SmartPeg Type 94 (1уп./5шт.).
- 7. Инструкция по эксплуатации
 - 8. Чехлы одноразовые – 3шт.

Приложение 2 Дополнительные сведения о маркировке.

Пример маркировки устройство Osstell Beacon (задняя часть корпуса прибора)




Маркировка держатель Osstell SmartPeg Mount

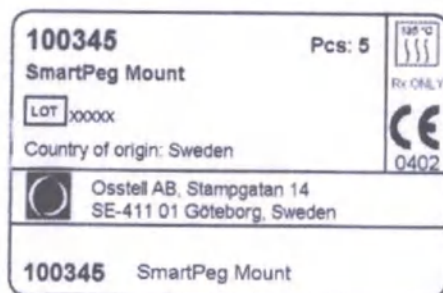


Маркировка упаковки для штифтов SmartPeg:



Маркировка блистерной упаковки штифтов SmartPeg:

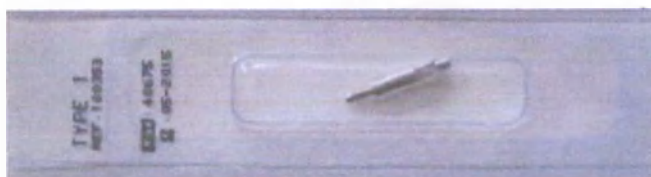

Задняя часть блистерной упаковки:

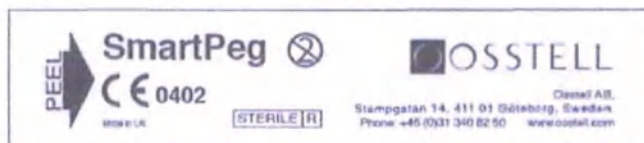

Проект маркировки на русском языке:




Устройство портативное для неинвазивного измерения стабильности дентальных имплантатов Osstell Beacon

РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции по эксплуатации.

Производитель: Osstell AB (Осстелл АБ) Stampgatan 14, 411, 01 GÖTEBORG, Sweden (Стампгатан 14, 411 01 Гётеборг, Швеция). Тел.: +46 31 340 82 50	Уполномоченный представитель: ООО «ВестМед» Россия, 121087, г. Москва, Промышленный проезд, д.5, стр. 1, эт.2, пом.1, ком.11,12 тел.: +7 (499) 993-01-43
---	--

Приложение 3 .Срок службы

Срок эксплуатации устройства определяется его аккумулятором. Аккумулятор не заменяется, однако по имеющимся данным о низкой интенсивности использования аккумулятора, а также по данным, полученным при использовании устройств-предшественников, можно сделать вывод, что срок службы аккумулятора составляет не менее 10 лет. Однако вследствие быстрого развития электроники некоторые компоненты через несколько лет могут исчезнуть из свободного доступа, поэтому компания определяет срок службы устройства Osstell Beacon в 5-10 лет.

Штифты SmartPegs (в стерильной упаковке) имеют срок годности 5 лет.

Приложение 4 **Гарантия**

Компания Osstell гарантирует, что ее Продукты не будут иметь дефектов материалов и изготовления во время первоначальной покупки потребителем.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Если в течение гарантийного периода этот Продукт не будет работать при нормальном использовании и обслуживании из-за ненадлежащих материалов или качества

изготовления, Osstell, по своему выбору, отремонтирует или заменит Продукт в соответствии с условиями, оговоренными в настоящем документе.

Условия

1. Гарантия действует только в том случае, если оригинал квитанции, выданной первоначальному покупателю, с указанием даты покупки и серийного номера, представлен вместе с продуктом, подлежащим ремонту или замене. Osstell оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если эта информация была удалена или изменена после первоначальной покупки Продукта у дилера.
2. Если Osstell ремонтирует или заменяет Продукт, на отремонтированный или замененный Продукт предоставляется гарантия на оставшееся время первоначального гарантийного периода или на девяносто (90) дней с даты ремонта, в зависимости от того, что дольше. Ремонт или замена может включать использование функционально эквивалентных восстановленных блоков. Замененные неисправные детали или компоненты становятся собственностью Osstell.
3. Настоящая гарантия не распространяется на любые неисправности Продукта из-за нормального износа или неправильного использования, включая, но, не ограничиваясь, использования, отличного от обычного и принятого, в соответствии с инструкциями Osstell по использованию и обслуживанию Продукта. Данная гарантия также не распространяется на любые неисправности Продукта, вызванные аварией, модификацией или регулировкой, стихийными бедствиями, неправильной вентиляцией или повреждениями, вызванными жидкостью.
4. Настоящая гарантия не распространяется на сбой Продукта из-за неправильного ремонта, установки, модификации или обслуживания, выполненного Пунктом сервисного обслуживания, не сертифицированным Osstell, или Сертифицированным Сервисным Центром, или открытия продукта лицами, не сертифицированными Osstell.
5. Гарантия не распространяется на неисправности Продукта, вызванные использованием оригинальных принадлежностей, не произведенных Osstell.
6. Гарантия распространяется на расходы по перевозке до 20 долларов США / 14 евро для конечных пользователей. Для дистрибьюторов - см. дистрибьюторское соглашение Osstell.
7. Если полнофункциональные продукты Osstell отправляются в Osstell, Osstell имеет право взимать плату за выявление причин и стоимость обработки.

В некоторых странах не допускается исключение или ограничение случайного или косвенного ущерба или ограничение срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому предыдущие ограничения или исключения могут к вам не относиться. Данная гарантия предоставляет вам определенные права, и вы также можете иметь другие юридические права, которые могут различаться в зависимости от страны их осуществления.

Если Osstell определит, что существующее повреждение/неисправность не подпадает под действие гарантии, с конечным пользователем свяжутся для определения того, следует ли устранить такое повреждение/неисправность за плату или следует вернуть Продукт конечному пользователю в том виде, в котором он был получен. Все связанные с этим расходы по транспортировке и обработке оплачиваются клиентом.

Приложение 5. Дополнительные сведения о технических характеристиках

Версия ПО, дата выпуска, класс безопасности	1.25 от 09.01.2020 В
--	---------------------------------

Приложение 6 Справочное руководство «Штифт одноразовый стерильный для измерения стабильности дентальных имплантатов SmartPeg»

Справочное руководство

Штифт одноразовый стерильный для измерения стабильности дентальных имплантатов SmartPeg (далее SmartPeg)

25016-72

Производитель имплантов	Модель	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartPeg	Имя
A.B. DENTAL DEVICES	Screw Type, Conical Groovy			3.75		100440	Type 32	
	Screw Type, Conical Groovy			4.5		100431	Type 27	
ACH MEDICAL	IB (Kisses)		Blue (2.5mm Hex)	4.5	All	100378	Type 06	
	IB (Kisses)		Blue (2.5mm Hex)	5.0	All	100378	Type 06	
	IB (Kisses)		Blue (2.5mm Hex)	5.5	All	100378	Type 06	
	IB (Kisses)		Pink (2.1mm Hex)	3.5	All	100455	Type 38	
	IB (Kisses)		Pink (2.1mm Hex)	4.0	All	100455	Type 38	
	IB-Mini (Kisses mini)		Green (1.7mm Hex)	3.0	All	100404	Type 22	
	IB-MT (Alicon)		Blue (2.5mm Hex)	3.5	All	100378	Type 06	
	IB-MT (Alicon)		Blue (2.5mm Hex)	4.0	All	100378	Type 06	
	IB-MT (Alicon)		Blue (2.5mm Hex)	4.5	All	100378	Type 06	
	IB-MT (Alicon)		Blue (2.5mm Hex)	5.0	All	100378	Type 06	
	IB-T (Kisses plus)		Blue (2.5mm Hex)	4.5	All	100378	Type 06	
	IB-T (Kisses plus)		Pink (2.1mm Hex)	3.5	All	100455	Type 38	
				4.0		100374	Type 14	
				3.3		100390	Type 17	
ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEM	One			4.2		100480	Type 49	
	One			3.3		100480	Type 49	
	Swel			3.75		100480	Type 49	
	Swel			4.2		100480	Type 49	
	Swel			5.0		100480	Type 49	
	Swel			6.0		100480	Type 49	
	Touareg CloseFit		NP	NP		100543	Type 60	
	Touareg CloseFit		WP	WP		100544	Type 61	**
	Touareg CloseFit			4.2		100480	Type 49	
	Touareg-S			5.0		100480	Type 49	
	Touareg-S					100378	Type 06	
AGS MEDIKAL	Implance Dental Implant System, Bone Level					100455	Type 38	
	Implance Dental Implant System, Mini Type					100378	Type 06	
	Implance Dental Implant System, Tissue Level							
ALLIANCE	SBN		NP	3.0		100543	Type 60	
	SBS		SP	5.0		100544	Type 61	
ALPHA BIO	ATI H			3.75		100425	Type 26	
	ATIO H					100425	Type 26	
	ICE H			3.75		100583	Type 78	
	Neo GS					100425	Type 26	
	Neo H			3.2		100554	Type 63	
	NICE 3.2 Conical connection					100425	Type 26	
	SPH							
ALPHA-DENT	Active 3D			3.25		100480	Type 49	
	Active 3D			3.75		100480	Type 49	
	Active 3D			4.2		100480	Type 49	
	Active 3D			5.0		100480	Type 49	
	Active 3D			3.25		100480	Type 49	
	Active Conus			3.75		100480	Type 49	
	Active Conus			4.2		100480	Type 49	
	Active Conus			5.0		100480	Type 49	
	Active Conus			4.2		100480	Type 49	
	Active Plus			5.0		100480	Type 49	
	Active Plus			3.3		100480	Type 49	
	Classic 3D			3.75		100480	Type 49	
	Classic 3D			4.2		100480	Type 49	
	Classic 3D			5.0		100480	Type 49	
	Classic 3D			3.3		100480	Type 49	
	Classic Conus			3.75		100480	Type 49	
	Classic Conus			4.2		100480	Type 49	
	Classic Conus			5.0		100480	Type 49	
	Classic Conus							
	Classic Conus							
ALPHA-GATE	Bioactive			3.75		100446	Type 35	
				3.4		100477	Type 46	
ALPHATECH				3.8		100477	Type 46	
				4.3		100477	Type 46	
				5.0		100477	Type 46	
				6.0		100477	Type 46	
				7.0		100477	Type 46	
ALTIMED JSC	Dental Implant DUOFIX	9012350802	Small	3.5	8	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012350902	Small	3.5	9	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012351102	Small	3.5	11	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012351302	Small	3.5	13	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012351402	Small	3.5	14	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012400802	Small	4	8	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012400902	Small	4	9	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012401102	Small	4	11	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012401302	Small	4	13	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012401402	Small	4	14	100455	Type 38	
	Dental Implant DUOFIX	9012450802	Wide	4.5	8	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012450902	Wide	4.5	9	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012451102	Wide	4.5	11	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012451302	Wide	4.5	13	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012451402	Wide	4.5	14	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012500802	Wide	5	8	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012500902	Wide	5	9	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012501102	Wide	5	11	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012501302	Wide	5	13	100544	Type 61	
	Dental Implant DUOFIX	9012501402	Wide	5	14	100544	Type 61	
ANKYLOS	C/X		A			100388	Type 16	
	C/X		B			100388	Type 16	
	C/X		C			100388	Type 16	
ANTHOGR	AnthoFit External Hexagon HE					100353	Type 01	
	AnthoFit Internal Octagon OI					100396	Type 18	
	Axiom PX			3.4		100455	Type 38	
	Axiom PX			4.0		100455	Type 38	
	Axiom PX			4.6		100455	Type 38	
	Axiom PX			5.2		100455	Type 38	
	Axiom REG			3.4		100455	Type 38	
	Axiom REG			4.0		100455	Type 38	
	Axiom REG			4.6		100455	Type 38	

NEW Новые имплантаты добавлены в список

* Добавлена дополнительная информация об имплантате, например, номер каталога, длина и т. д.

** Изменен тип SmartPeg.

Применяемая имплантация	Материал	Каталожный №	Тип имплантата	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No.		Стойкость	Наличие
						100353	100355		
ANTHOGR	Aluminiy			5,2		100350	100351	Тип 04	
	Osse								
AROS IMPLANTS	Classic			4М		100411	100412	Тип 22	
	Premium			4М		100411	100412	Тип 22	
	Smart			4М		100411	100412	Тип 21	
ALIMENT IMPLANT SYSTEM	Coral External			3,5		100438	100439	Тип 30	
	Coral External			4,1		100353	100355	Тип 01	
	Coral External			5,1		100353	100355	Тип 03	
	Internal Hexagon Coral			3,5		100440	100441	Тип 32	
	Internal Hexagon Coral			4,1		100440	100441	Тип 32	
	Internal Hexagon Ocean			3,5		100440	100441	Тип 32	
	Internal Hexagon Ocean			4,1		100440	100441	Тип 32	
	Ocean External			4,1		100438	100439	Тип 30	
	Ocean External			4,1		100353	100355	Тип 01	
	Ocean External			4,1		100353	100355	Тип 01	
BAB DENTAL	Dental 3P Implant			3,5		100425	100426	Тип 26	
	Dental 3P Implant			4,0		100425	100426	Тип 26	
	Dental 3P Implant			4,5		100425	100426	Тип 26	
	Dental 3P Implant			5,0		100425	100426	Тип 26	
	DENTAL 3P Implant			4,0		100425	100426	Тип 26	
	DENTAL 3P Implant			4,5		100425	100426	Тип 26	
	DENTAL 3P Implant			4,5		100425	100426	Тип 26	
	DENTAL 3P Implant			5,0		100425	100426	Тип 26	
	DENTAL 3P Implant			5,0		100425	100426	Тип 26	
	DENTAL 3P Implant			6,0		100425	100426	Тип 26	
BEGO IMPLANT SYSTEMS	DENTAL 3P Implant			4,5		100425	100426	Тип 26	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
	Dental 3P Implant			3,7		100402	100403	Тип 21	
BIO3	Implant Advanced AT1			3,3		100460	100461	Тип 49	
	Implant Advanced AT1			3,8		100460	100461	Тип 49	
	Implant Advanced AT1			4,2		100460	100461	Тип 49	
	Implant Advanced AT1			5,0		100460	100461	Тип 49	
	Implant Progressive PT1			3,3		100460	100461	Тип 49	
	Implant Progressive PT1			3,8		100460	100461	Тип 49	
	Implant Progressive PT1			4,2		100460	100461	Тип 49	
	Implant Progressive PT1			5,0		100460	100461	Тип 49	
	Implant Progressive PT1			5,0		100460	100461	Тип 49	
	Implant Progressive PT1			5,0		100460	100461	Тип 49	
BIOBENT	BONE LEVEL IMPLANT			3,7		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
	BONE LEVEL IMPLANT			4,1		100402	100403	Тип 21	
BIOCORTECS	External			3,5		100436	100437	Тип 30	
	External			4,0		100436	100437	Тип 30	
	External			5,0		100436	100437	Тип 30	
	External			6,0		100436	100437	Тип 30	
	External			6,0		100436	100437	Тип 30	
	External			6,0		100436	100437	Тип 30	
	External			6,0		100436	100437	Тип 30	
	External			6,0		100436	100437	Тип 30	
	External			6,0		100436	100437	Тип 30	
	External			6,0		100436	100437	Тип 30	

Продукты-сервисы имплантов	Модель	Категория No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	Статус	Наименование
BIOHORIZONS	Single Stage		Blue			100442	Type 33	Новое
	Single Stage		Green			100431	Type 27	
	Single Stage		Yellow			100440	Type 32	
	Fluorated Internal		Blue			100442	Type 31	
	Fluorated Internal		Green			100431	Type 27	
	Fluorated Internal		Yellow			100440	Type 32	
BIOINFINTY	Junior Platform			3.2		100455	Type 38	
	Standard Platform			4.8		100425	Type 26	
BIOHATE	Biomate Bone Type Implant	JAA-009	RD	4.8	8	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-010	RD	4.8	10	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-011	RD	4.8	12	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-012	RD	4.8	14	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-013	RD	5.5	8	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-014	RD	5.5	10	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-015	RD	5.5	12	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-016	RD	5.5	14	100386	Type 15	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-001	SD	3.3	8	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-002	SD	3.3	10	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-003	SD	3.3	12	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-004	SD	3.3	14	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-005	SD	4.1	8	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-006	SD	4.1	10	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-007	SD	4.1	12	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-008	SD	4.1	14	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant	JAA-017	SD	3.5	8	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-018	SD	3.5	10	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-019	SD	3.5	12	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-020	SD	3.5	14	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-021	SD	4.0	8	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-022	SD	4.0	10	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-023	SD	4.0	12	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-024	SD	4.0	14	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-025	SD	4.5	8	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-026	SD	4.5	10	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-027	SD	4.5	12	100455	Type 38	
	Biomate Bone Type Implant Plus	JAA-028	SD	4.5	14	100455	Type 38	
BIOHET JI	NanoTite Certain Micro-implant			3.25		100472	Type 45	
	NanoTite External Hex			XP 3/4		100353	Type 01	
	NanoTite External Hex			XP 4/5		100353	Type 01	
	NanoTite External Hex			XP 5/6		100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Blue			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Purple			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Yellow			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Purple			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Blue			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Green			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Purple			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Yellow			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Purple			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Blue			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Green			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Purple			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Yellow			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Purple			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Blue			100353	Type 01	
	NanoTite External Hex		Green			100353	Type 01	
BIOHET SRL	DN			AI		100436	Type 30	
	CR			AI		100431	Type 01	
	IM			AI		100431	Type 27	
	R			AI		100440	Type 32	
	RI			3.0		100455	Type 38	
	RI			3.6		100440	Type 32	
	RI			4.2		100440	Type 32	
	RI			4.8		100440	Type 32	
	RI			5.4		100440	Type 32	
	RI			6.0		100440	Type 32	
	RI			6.6		100440	Type 32	
	RI			7.2		100440	Type 32	
	RI			7.8		100440	Type 32	
	RI			8.4		100440	Type 32	
	RI			9.0		100440	Type 32	
	RI			9.6		100440	Type 32	
	RI			10.2		100440	Type 32	
	RI			10.8		100440	Type 32	
	RI			11.4		100440	Type 32	
	RI			12.0		100440	Type 32	
BIOHET DENTAL	Konnect			3.6		100383	Type 16	
	Konnect			4.2		100383	Type 16	
	Konnect			4.8		100383	Type 16	
	Konnect			5.4		100383	Type 16	
	Konnect			6.0		100383	Type 16	
	Konnect			6.6		100383	Type 16	
	Konnect			7.2		100383	Type 16	
	Konnect			7.8		100383	Type 16	
	Konnect			8.4		100383	Type 16	
	Konnect			9.0		100383	Type 16	
BLUE SKY BIO	BIO Conus 12	IDH010	3	3.0	10	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH011	3	3.0	11	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH012	3	3.0	12	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH013	3	3.0	13	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH014	3	3.0	14	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH015	3	3.0	15	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH016	3	3.0	16	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH017	3	3.0	17	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH018	3	3.0	18	100756	Type 33	Новое
	BIO Conus 12	IDH019	3	3.0	19	100756	Type 33	Новое

[illegible]

[illegible]

Производитель имплантов	Модель	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartReg	Новое
DENTEGRIS	Straight & Tapered			3.75		100440	Type 32	
	Straight & Tapered			4.5		100440	Type 32	
	Straight & Tapered			4.75		100440	Type 32	
	Straight & Tapered			5.5		100478	Type 47	
DENTIS DENTAL	Internal			3.7		100350	Type 04	
	Internal			4.3		100350	Type 04	
	Internal			4.8		100350	Type 04	
	OneQ S-clean Narrow (SLA surface/Submerged)			3.0		100404	Type 22	
	OneQ S-clean Narrow (SLA surface/Submerged)			3.3		100404	Type 22	
	OneQ S-clean Regular (SLA surface/Submerged)			3.7		100372	Type 11	
	OneQ S-clean Regular (SLA surface/Submerged)			4.2		100372	Type 11	
	OneQ S-clean Regular (SLA surface/Submerged)			4.7		100372	Type 11	
	OneQ S-clean Regular (SLA surface/Submerged)			5.2		100372	Type 11	
	OneQ S-clean Wide (SLA surface/Submerged)			6.0		100372	Type 11	
	OneQ S-clean Wide (SLA surface/Submerged)			7.0		100372	Type 11	
	OneQ S-clean Wide (SLA surface/Submerged)			8.0		100372	Type 11	
	Save Submerged			5.5		100380	Type 07	
	Save Submerged			6.0		100380	Type 07	
	S-clean Mini (Submerged)			3.7		100372	Type 11	
	S-clean Regular (Submerged)			4.1		100372	Type 11	
	S-clean Regular (Submerged)			4.3		100372	Type 11	
	S-clean Wide (Submerged)			4.8		100372	Type 11	
DENTIUM	Genios			3.0		100554	Type 63	
	Genios			3.6		100402	Type 21	
	Genios			4.3		100402	Type 21	
	Genios			5.0		100402	Type 21	
	Implantium		Blue 4.5	4.3		100378	Type 06	
	Implantium		Green 4.0	3.8		100378	Type 06	
	Implantium		Yellow 3.6	3.4		100378	Type 06	
	Simple Line			3.8		100380	Type 07	
	Simple Line			4.3		100380	Type 07	
	Simple Line			4.8		100380	Type 07	
	Super Line			4.0		100380	Type 07	
	Super Line			7.0		100380	Type 07	
DENTSPLY IMPLANTS	ANKYLOS CX Implants		A			100388	Type 16	
	ANKYLOS CX Implants		B			100388	Type 16	
	ANKYLOS CX Implants		C			100388	Type 16	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26340	Blue	4.8 S	6	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26341	Blue	4.8 S	8	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26351	Blue	4.8 C	8	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26342	Blue	4.8 S	9	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26352	Blue	4.8 C	9	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26343	Blue	4.8 S	11	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26353	Blue	4.8 C	11	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26344	Blue	4.8 S	13	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26354	Blue	4.8 C	13	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26345	Blue	4.8 S	15	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26355	Blue	4.8 C	15	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26346	Blue	4.8 S	17	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26356	Blue	4.8 C	17	100478	Type 47	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26360	Brown	5.4 S	6	100462	Type 40	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26361	Brown	5.4 S	8	100462	Type 40	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26362	Brown	5.4 S	9	100462	Type 40	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26363	Brown	5.4 S	11	100462	Type 40	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26364	Brown	5.4 S	13	100462	Type 40	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26365	Brown	5.4 S	15	100462	Type 40	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26301	Green	3.0 S	8	100481	Type 50	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26302	Green	3.0 S	9	100481	Type 50	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26303	Green	3.0 S	11	100481	Type 50	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26304	Green	3.0 S	13	100481	Type 50	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26305	Green	3.0 S	15	100481	Type 50	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26310	Purple	3.6 S	6	100455	Type 38	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26311	Purple	3.6 S	8	100455	Type 38	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26312	Purple	3.6 S	9	100455	Type 38	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26313	Purple	3.6 S	11	100455	Type 38	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26314	Purple	3.6 S	13	100455	Type 38	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26315	Purple	3.6 S	15	100455	Type 38	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26316	Purple	3.6 S	17	100455	Type 38	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26320	Yellow	4.2 S	6	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26321	Yellow	4.2 S	8	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26331	Yellow	4.2 C	8	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26322	Yellow	4.2 S	9	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26332	Yellow	4.2 C	9	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26323	Yellow	4.2 S	11	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26333	Yellow	4.2 C	11	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26324	Yellow	4.2 S	13	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26334	Yellow	4.2 C	13	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26325	Yellow	4.2 S	15	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26335	Yellow	4.2 C	15	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26326	Yellow	4.2 S	17	100480	Type 49	
	ASTRA TECH IMPLANT EV	26336	Yellow	4.2 C	17	100480	Type 49	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25446	Blue	4.8 PS	8	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25458	Blue	4.8 PC	8	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25447	Blue	4.8 PS	9	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25459	Blue	4.8 PC	9	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25448	Blue	4.8 PS	11	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25460	Blue	4.8 PC	11	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25449	Blue	4.8 PS	13	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25461	Blue	4.8 PC	13	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25450	Blue	4.8 PS	15	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25462	Blue	4.8 PC	15	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25451	Blue	4.8 PS	17	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25463	Blue	4.8 PC	17	100440	Type 32	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25440	Yellow	4.2 PS	8	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25452	Yellow	4.2 PC	8	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25441	Yellow	4.2 PS	9	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25453	Yellow	4.2 PC	9	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25442	Yellow	4.2 PS	11	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25454	Yellow	4.2 PC	11	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25443	Yellow	4.2 PS	13	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25455	Yellow	4.2 PC	13	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25444	Yellow	4.2 PS	15	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25456	Yellow	4.2 PC	15	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25445	Yellow	4.2 PS	17	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed Profile EV	25457	Yellow	4.2 PC	17	100370	Type 10	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX Aqua			3.55		100455	Type 38	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX Aqua			4.05		100455	Type 38	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX L Lac			5.0 S		100380	Type 07	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX L Lac			4.5		100380	Type 07	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX L Lac			5.0		100380	Type 07	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX Profile			5.0 S		100378	Type 06	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX Profile			4.5		100378	Type 06	
	ASTRA TECH Implant system OsseoSpeed TX Profile			5.0		100378	Type 06	

NEW Новые импланты добавлены в список

* Добавлена дополнительная информация об имплантатах, например, номер

каталога, длина и т. д.

** Изменен тип SmartReg.

Производитель имплантов	Модель	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartReg	Новое
EUROTEKNIKA	AESTHETICA ¹	AIER_4148.100	RP	4.1	10	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4148.120	RP	4.1	12	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4148.140	RP	4.1	14	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4848.060	RP	4.8	6	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4848.080	RP	4.8	8	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4848.100	RP	4.8	10	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4848.120	RP	4.8	12	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4848.140	RP	4.8	14	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4865.060	WP	4.8	6	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4865.080	WP	4.8	8	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4865.100	WP	4.8	10	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4865.120	WP	4.8	12	100544	Type 61	
	AESTHETICA ¹	AIER_4865.140	WP	4.8	14	100544	Type 61	
	NATEA ⁺	NIDP_3637.080	NP	3.6	8	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_3637.100	NP	3.6	10	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_3637.120	NP	3.6	12	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_3637.140	NP	3.6	14	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4142.060	NP	4.1	6	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4142.080	NP	4.1	8	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4142.100	NP	4.1	10	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4142.120	NP	4.1	12	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4142.140	NP	4.1	14	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4849.060	NP	4.8	6	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4849.080	NP	4.8	8	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4849.100	NP	4.8	10	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4849.120	NP	4.8	12	100455	Type 38	
	NATEA ⁺	NIDP_4849.140	NP	4.8	14	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_35.080	NP	3.5	8	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_35.100	NP	3.5	10	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_35.120	NP	3.5	12	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_35.140	NP	3.5	14	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_35.160	NP	3.5	16	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_35.180	NP	3.5	18	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_40.080	NP	4.0	8	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_40.100	NP	4.0	10	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_40.120	NP	4.0	12	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_40.140	NP	4.0	14	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_40.160	NP	4.0	16	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_40.180	NP	4.0	18	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_45.060	NP	4.5	6	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_45.080	NP	4.5	8	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_45.100	NP	4.5	10	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_45.120	NP	4.5	12	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_45.140	NP	4.5	14	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_45.160	NP	4.5	16	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_50.060	NP	5.0	6	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_50.080	NP	5.0	8	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_50.100	NP	5.0	10	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_50.120	NP	5.0	12	100455	Type 38	
	NATURACTIS	NIP_50.140	NP	5.0	14	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_35.080	NP	3.5	8	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_35.100	NP	3.5	10	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_35.120	NP	3.5	12	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_35.140	NP	3.5	14	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_40.080	NP	4.0	8	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_40.100	NP	4.0	10	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_40.120	NP	4.0	12	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_40.140	NP	4.0	14	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_45.060	NP	4.5	6	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_45.080	NP	4.5	8	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_45.100	NP	4.5	10	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_45.120	NP	4.5	12	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_45.140	NP	4.5	14	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_50.060	NP	5.0	6	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_50.080	NP	5.0	8	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_50.100	NP	5.0	10	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_50.120	NP	5.0	12	100455	Type 38	
	NATURALL +	NICP_50.140	NP	5.0	14	100455	Type 38	
	UNEVA ⁺	UHOP_3641.080	NP	3.6	8	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_3641.100	NP	3.6	10	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_3641.120	NP	3.6	12	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_3641.140	NP	3.6	14	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4141.080	RP	4.1	8	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4141.100	RP	4.1	10	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4141.120	RP	4.1	12	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4141.140	RP	4.1	14	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4849.060	WP	4.8	6	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4849.080	WP	4.8	8	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4849.100	WP	4.8	10	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4849.120	WP	4.8	12	100353	Type 01	
	UNEVA ⁺	UHOP_4849.140	WP	4.8	14	100353	Type 01	
FAIR IMPLANT	FairTwo			3.5		100484	Type 53	
	FairTwo			4.2		100484	Type 53	
	FairTwo			5.0		100378	Type 06	
	FairTwo			6.0		100378	Type 06	
CALIMPLANT	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-03210		3.2	10	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-03212		3.2	12	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-03214		3.2	14	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-03508		3.5	8	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-03510		3.5	10	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-03512		3.5	12	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-03514		3.5	14	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-04008		4.0	8	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-04010		4.0	10	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-04012		4.0	12	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-04014		4.0	14	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-05008		5.0	8	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-05010		5.0	10	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-05012		5.0	12	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC IMPLANT	ICI-05014		5.0	14	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-3508		3.5	8	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-3510		3.5	10	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-3512		3.5	12	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-3514		3.5	14	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-3516		3.5	16	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-3518		3.5	18	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4006		4.0	6	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4008		4.0	8	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4010		4.0	10	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4012		4.0	12	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4014		4.0	14	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4016		4.0	16	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4018		4.0	18	100543	Type 60	
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPX-4506		4.5	6	100543	Type 60	

NEW Новые импланты добавлены в список
 * Добавлена дополнительная информация об импланте, например, номер каталога, длина и т.д.
 ** Изменен тип SmartReg.

Препараты dentures	Means	Категория	Партия	Длина (мм)	Диаметр (мм)	Art. No	SmartReg	Наличие
GAUMPLANT	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPK-4510			4,5	100543	Type 60	Наличие
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPK-4510			4,5	100543	Type 60	Наличие
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPK-4512			4,5	100543	Type 60	Наличие
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPK-4514			4,5	100543	Type 60	Наличие
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPK-6006			5,0	100543	Type 60	Наличие
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPK-6010			5,0	100543	Type 60	Наличие
	HEXAGONAL IC POST-EXTRACTION IMPLANT	IPK-6012			5,0	100543	Type 60	Наличие
GC IMPLANT	Active		Narrow			100555	Type 38	
	Active		Regular			100555	Type 38	
	External Plus		Wide		3,0	100555	Type 38	
	External Plus				3,4	100555	Type 38	
	External Plus				3,8	100555	Type 38	
	External Plus				5,0	100555	Type 38	
	External Plus				5,0	100555	Type 38	
GIMAS	PFON EVO SERIES				3,0	100545	Type 62	
	PFON EVO SERIES				3,5	100545	Type 38	
	PFON EVO SERIES				4,3	100545	Type 38	
	PFON EVO SERIES				5,0	100544	Type 61	
	PFON EVO SERIES				7,0	100550	Type 04	
	PFON EVO SERIES							
	PFON EVO SERIES							
HAIN	FAHRED							
	FAHRED							
	FAHRED							
	FAHRED							
	FAHRED							
	FAHRED							
	FAHRED							
HOSSEN	ETH				4,0	100478	Type 47	
	ETH				4,5	100478	Type 47	
	ETH				5,0	100478	Type 47	
	ETH		Mini		5,5	100376	Type 05	
	ETH		Mini		6,0	100376	Type 06	
	ETH		Mini		7,0	100376	Type 06	
	ETH		Mini		7,0	100376	Type 06	
IBS INNO BIO SURG	Magcore				5,5	100455	Type 38	
	Magcore				5,5	100455	Type 38	
	Magcore				5,5	100455	Type 38	
	Magcore				5,5	100455	Type 38	
	Magcore				5,5	100455	Type 38	
	Magcore				5,5	100455	Type 38	
	Magcore				5,5	100455	Type 38	
IDE EVOLUTION	IDE				3,75	100358	Type 18	
	IDE				4,0	100358	Type 18	
	IDE				4,0	100358	Type 18	
	IDE				4,0	100358	Type 18	
	IDE				4,0	100358	Type 18	
	IDE				4,0	100358	Type 18	
	IDE				4,0	100358	Type 18	
IMMEDIATELOAD	IMMEDIATELOAD				4,0	100480	Type 43	
	IMMEDIATELOAD				4,0	100480	Type 43	
	IMMEDIATELOAD				4,0	100480	Type 43	
	IMMEDIATELOAD				4,0	100480	Type 43	
	IMMEDIATELOAD				4,0	100480	Type 43	
	IMMEDIATELOAD				4,0	100480	Type 43	
	IMMEDIATELOAD				4,0	100480	Type 43	
IMPLANT DIRECT	LEGACY1				4	100480	Type 43	Наличие
	LEGACY1				4	100480	Type 43	Наличие
	LEGACY1				4	100480	Type 43	Наличие
	LEGACY1				4	100480	Type 43	Наличие
	LEGACY1				4	100480	Type 43	Наличие
	LEGACY1				4	100480	Type 43	Наличие
	LEGACY1				4	100480	Type 43	Наличие
IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL (DDI)	DDI				3,5	100480	Type 43	Наличие
	DDI				3,5	100480	Type 43	Наличие
	DDI				3,5	100480	Type 43	Наличие
	DDI				3,5	100480	Type 43	Наличие
	DDI				3,5	100480	Type 43	Наличие
	DDI				3,5	100480	Type 43	Наличие
	DDI				3,5	100480	Type 43	Наличие
IMPLANTS SWISS	IMPLANTS SWISS				3,5	100480	Type 43	Наличие
	IMPLANTS SWISS				3,5	100480	Type 43	Наличие
	IMPLANTS SWISS				3,5	100480	Type 43	Наличие
	IMPLANTS SWISS				3,5	100480	Type 43	Наличие
	IMPLANTS SWISS				3,5	100480	Type 43	Наличие
	IMPLANTS SWISS				3,5	100480	Type 43	Наличие
	IMPLANTS SWISS				3,5	100480	Type 43	Наличие

Провайдер/сервис поставщика	Модель	Классификация	Платформа	Длина (мм)	Диаметр (мм)	Art. No	Состояние	Имя
INTEC	Hard-Fix			3,75		100353	Type 01	
	Hard-Fix			4,75		100353	Type 01	
INTRALOCK SYSTEM	Internal		SQ			100378	Type 06	
	Internal		Wide			100478	Type 47	
JRES	IMAX N-ISE			3,3		100355	Type 02	
	IMAX N-ISE			3,7		100353	Type 01	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,1		100353	Type 01	
	IMAX N-ISE			5,2		100353	Type 01	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,7		100431	Type 27	
	IMAX N-ISE			4,1		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			5,2		100431	Type 27	
	IMAX N-ISE			3,1		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,1		100431	Type 27	
	IMAX N-ISE			4,7		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,1		100431	Type 01	
	IMAX N-ISE			4,1		100431	Type 01	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,7		100431	Type 01	
	IMAX N-ISE			3,7		100431	Type 04	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,1		100431	Type 04	
	IMAX N-ISE			4,7		100431	Type 04	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,7		100431	Type 27	
	IMAX N-ISE			4,1		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,7		100431	Type 27	
	IMAX N-ISE			3,7		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,1		100431	Type 27	
	IMAX N-ISE			4,7		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,75		100425	Type 26	
	IMAX N-ISE			3,2		100455	Type 36	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,7		100440	Type 32	
	IMAX N-ISE			4,3		100440	Type 32	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			5,0		100440	Type 32	
	IMAX N-ISE			3,2		100338	Type 18	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,7		100338	Type 18	
	IMAX N-ISE			4,2		100338	Type 18	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,7		100386	Type 15	
	IMAX N-ISE			4,2		100480	Type 49	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,7		100478	Type 47	
	IMAX N-ISE			5,2		100478	Type 47	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,3		100378	Type 06	
	IMAX N-ISE			4,2		100378	Type 06	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,8		100431	Type 27	
	IMAX N-ISE			4,5		100442	Type 33	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			5,5		100442	Type 33	
	IMAX N-ISE			6,5		100442	Type 33	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,1		100442	Type 33	
	IMAX N-ISE			3,5		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,0		100442	Type 33	
	IMAX N-ISE			4,8		100431	Type 27	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,75		100425	Type 26	
	IMAX N-ISE			3,3		100456	Type 30	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,75		100353	Type 01	
	IMAX N-ISE			4,0		100353	Type 01	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			5,0		100357	Type 03	
	IMAX N-ISE			6,0		100357	Type 03	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,5		100489	Type 49	
	IMAX N-ISE			4,0		100480	Type 49	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,5		100480	Type 49	
	IMAX N-ISE			4,8		100489	Type 49	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,3		100353	Type 02	
	IMAX N-ISE			3,7		100353	Type 01	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,2		100353	Type 01	
	IMAX N-ISE			4,7		100357	Type 03	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			3,0		100497	Type 57	
	IMAX N-ISE			3,5		100497	Type 57	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE			4,0		100425	Type 26	
	IMAX N-ISE			4,5		100436	Type 30	
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE					100436	Type 30	
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							
IMAX N-ISE	IMAX N-ISE							
	IMAX N-ISE							

Продукция/серия/наименование	Материал	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	Статус/Рег	Наиме
LITTLE IMPLANT CO.	THE MARC REVINS	P50013		5	3.3	100460	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60015		5	15	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60017		6	7	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60018		6	8	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60019		6	10	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60011		6	11.5	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60013		6	13	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60010		3.85	10	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60011		3.85	11.5	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60013		3.85	13	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60010		3.85	15	100480	Type 49	
	THE MARC REVINS	P60011		3.85	15	100480	Type 49	
MEDENTIA	MRipulse*			3.5		100485	Type 38	
	MRipulse*			4.0		100485	Type 38	
	MRipulse*			4.5		100485	Type 38	
	MRipulse*			5.0		100485	Type 38	
	MRipulse*			5.5		100485	Type 38	
	MRipulse*			6.0		100485	Type 38	
	MRipulse*			6.5		100485	Type 38	
	MRipulse*			7.0		100485	Type 38	
	MRipulse*			7.5		100485	Type 38	
	MRipulse*			8.0		100485	Type 38	
	MRipulse*			8.5		100485	Type 38	
	MRipulse*			9.0		100485	Type 38	
MEDENTIS	ICK Active Master	ACM-001-350080	Standard	3.75	8	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-350100	Standard	3.75	10	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-350125	Standard	3.75	12.5	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-350150	Standard	3.75	15	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425100	Standard	4.1	8	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425125	Standard	4.1	10	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425150	Standard	4.1	12.5	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425175	Standard	4.1	15	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425200	Standard	4.1	17.5	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425225	Standard	4.1	20	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425250	Standard	4.1	22.5	100485	Type 54	Now
	ICK Active Master	ACM-001-425275	Standard	4.1	25	100485	Type 54	Now
MEDICAL INSTINCT	Bone Trust	MI-001-250100	Standard	3.4	11.5	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250125	Standard	3.4	13	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250150	Standard	3.4	14.5	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250175	Standard	3.4	16	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250200	Standard	3.4	17.5	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250225	Standard	3.4	19	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250250	Standard	3.4	20.5	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250275	Standard	3.4	22	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250300	Standard	3.4	23.5	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250325	Standard	3.4	25	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250350	Standard	3.4	26.5	100466	Type 44	Now
	Bone Trust	MI-001-250375	Standard	3.4	28	100466	Type 44	Now
MEDICAMTECHNOLOGIES	Fix 1	MT-001-250100	Standard	3.4	11.5	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250125	Standard	3.4	13	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250150	Standard	3.4	14.5	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250175	Standard	3.4	16	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250200	Standard	3.4	17.5	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250225	Standard	3.4	19	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250250	Standard	3.4	20.5	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250275	Standard	3.4	22	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250300	Standard	3.4	23.5	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250325	Standard	3.4	25	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250350	Standard	3.4	26.5	100466	Type 44	Now
	Fix 1	MT-001-250375	Standard	3.4	28	100466	Type 44	Now
MEGAGEN	AnyOne	AG-001-250100	Standard	3.4	11.5	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250125	Standard	3.4	13	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250150	Standard	3.4	14.5	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250175	Standard	3.4	16	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250200	Standard	3.4	17.5	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250225	Standard	3.4	19	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250250	Standard	3.4	20.5	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250275	Standard	3.4	22	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250300	Standard	3.4	23.5	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250325	Standard	3.4	25	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250350	Standard	3.4	26.5	100466	Type 44	Now
	AnyOne	AG-001-250375	Standard	3.4	28	100466	Type 44	Now

Проектируемый материал	Модель	Каталог №	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartPag	Наиме
ЖЕОЦЕНТ	Drive CM Акция	109.687		5.0	15	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.688		5.0	18	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.104		3.5	8	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.594		3.5	10	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.105		3.5	11.5	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.595		3.5	13	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.596		3.5	16	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.106		3.5	18	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.100		4.3	8	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.100		4.3	10	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.591		4.3	11.5	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.592		4.3	13	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.593		4.3	16	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.107		4.3	18	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.102		5.0	8	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.597		5.0	10	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.103		5.0	11.5	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.598		5.0	13	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.599		5.0	16	100479	Type 48	
	Drive CM Neoporus	109.108		5.0	18	100479	Type 48	
	Drive CM	109.558	GM	3.5	8	100543	Type 60	
	Drive CM	109.559	GM	3.5	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.560	GM	3.5	11.5	100543	Type 60	
	Drive CM	109.561	GM	3.5	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.562	GM	3.5	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.563	GM	3.5	18	100543	Type 60	
	Drive CM	109.564	GM	4.3	8	100543	Type 60	
	Drive CM	109.565	GM	4.3	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.566	GM	4.3	11.5	100543	Type 60	
	Drive CM	109.567	GM	4.3	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.568	GM	4.3	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.569	GM	4.3	18	100543	Type 60	
	Drive CM	109.570	GM	5.0	8	100543	Type 60	
	Drive CM	109.571	GM	5.0	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.572	GM	5.0	11.5	100543	Type 60	
	Drive CM	109.573	GM	5.0	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.574	GM	5.0	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.575	GM	5.0	18	100543	Type 60	
	Drive CM	109.576	GM	4.3	8	100333	Type 01	
	Drive CM	109.577	GM	4.3	10	100333	Type 01	
	Drive CM	109.578	GM	4.3	11.5	100333	Type 01	
	Drive CM	109.579	GM	4.3	13	100333	Type 01	
	Drive CM	109.580	GM	4.3	16	100333	Type 01	
	Drive CM	109.581	GM	5.0	8	100333	Type 01	
	Drive CM	109.582	GM	5.0	10	100333	Type 01	
	Drive CM	109.583	GM	5.0	11.5	100333	Type 01	
	Drive CM	109.584	GM	5.0	13	100333	Type 01	
	Drive CM	109.585	GM	5.0	16	100333	Type 01	
	Drive CM	109.586	GM	5.0	18	100333	Type 01	
	Drive CM	109.587	GM	4.3	8	100543	Type 60	
	Drive CM	109.588	GM	4.3	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.589	GM	4.3	11.5	100543	Type 60	
	Drive CM	109.590	GM	4.3	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.591	GM	4.3	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.592	GM	4.3	18	100543	Type 60	
	Drive CM	109.593	GM	4.3	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.594	GM	4.3	11	100543	Type 60	
	Drive CM	109.595	GM	4.3	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.596	GM	4.3	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.597	GM	4.3	18	100543	Type 60	
	Drive CM	109.598	GM	5.0	8	100543	Type 60	
	Drive CM	109.599	GM	5.0	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.600	GM	5.0	11.5	100543	Type 60	
	Drive CM	109.601	GM	5.0	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.602	GM	5.0	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.603	GM	5.0	18	100543	Type 60	
	Drive CM	109.604	GM	5.0	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.605	GM	5.0	11	100543	Type 60	
	Drive CM	109.606	GM	5.0	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.607	GM	5.0	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.608	GM	5.0	18	100543	Type 60	
	Drive CM	109.609	GM	6.0	8	100543	Type 60	
	Drive CM	109.610	GM	6.0	10	100543	Type 60	
	Drive CM	109.611	GM	6.0	11.5	100543	Type 60	
	Drive CM	109.612	GM	6.0	13	100543	Type 60	
	Drive CM	109.613	GM	6.0	16	100543	Type 60	
	Drive CM	109.614	GM	3.5	7	100479	Type 48	
	Drive CM	109.615	GM	3.5	8	100479	Type 48	
	Drive CM	109.616	GM	3.5	9	100479	Type 48	
	Drive CM	109.617	GM	3.5	11	100479	Type 48	
	Drive CM	109.618	GM	3.5	13	100479	Type 48	
	Drive CM	109.619	GM	3.5	15	100479	Type 48	
	Drive CM	109.620	GM	3.5	17	100479	Type 48	
	Drive CM	109.621	GM	3.75	7	100479	Type 48	
	Drive CM	109.622	GM	3.75	8	100479	Type 48	
	Drive CM	109.623	GM	3.75	9	100479	Type 48	
	Drive CM	109.624	GM	3.75	11	100479	Type 48	
	Drive CM	109.625	GM	3.75	13	100479	Type 48	
	Drive CM	109.626	GM	3.75	15	100479	Type 48	
	Drive CM	109.627	GM	3.75	17	100479	Type 48	
	Drive CM	109.628	GM	4.0	7	100479	Type 48	
	Drive CM	109.629	GM	4.0	8	100479	Type 48	
	Drive CM	109.630	GM	4.0	9	100479	Type 48	
	Drive CM	109.631	GM	4.0	11	100479	Type 48	
	Drive CM	109.632	GM	4.0	13	100479	Type 48	
	Drive CM	109.633	GM	4.0	15	100479	Type 48	
	Drive CM	109.634	GM	4.0	17	100479	Type 48	
	Drive CM	109.635	GM	4.0	19	100479	Type 48	
	Drive CM	109.636	GM	5.0	7	100479	Type 48	
	Drive CM	109.637	GM	5.0	8	100479	Type 48	
	Drive CM	109.638	GM	5.0	9	100479	Type 48	
	Drive CM	109.639	GM	5.0	11	100479	Type 48	
	Drive CM	109.640	GM	5.0	13	100479	Type 48	
	Drive CM	109.641	GM	5.0	15	100479	Type 48	
	Drive CM	109.642	GM	5.0	17	100479	Type 48	
	Drive CM	109.643	GM	5.0	19	100479	Type 48	
	Drive CM	109.644	GM	5.0	21	100479	Type 48	
	Drive CM	109.645	GM	5.0	23	100479	Type 48	
	Drive CM	109.646	GM	5.0	25	100479	Type 48	
	Drive CM	109.647	GM	5.0	27	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.648	GM	3.5	9	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.649	GM	3.5	11	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.650	GM	3.5	13	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.651	GM	3.5	15	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.652	GM	3.5	17	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.653	GM	3.5	19	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.654	GM	3.5	21	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.655	GM	3.5	23	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.656	GM	3.75	9	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.657	GM	3.75	11	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.658	GM	3.75	13	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.659	GM	3.75	15	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.660	GM	3.75	17	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.661	GM	3.75	19	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.662	GM	3.75	21	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.663	GM	3.75	23	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.664	GM	3.75	25	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.665	GM	3.75	27	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.666	GM	3.75	29	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.667	GM	3.75	31	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.668	GM	3.75	33	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.669	GM	3.75	35	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.670	GM	3.75	37	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.671	GM	3.75	39	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.672	GM	3.75	41	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.673	GM	3.75	43	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.674	GM	3.75	45	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.675	GM	3.75	47	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.676	GM	3.75	49	100479	Type 48	
	Drive CM EX	109.677	GM	3.75	51	100479	Type 48	

Продукция и наименование	Матрица	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	Статус
HOBEL BIOCARE	NobelReplace Tapered	300761	WP	5.5	12	100769	SmartReg
	NobelReplace Conical Connection		NP	3.5		100743	Type 60
	NobelReplace Conical Connection		NP	4.3		100544	Type 61
	NobelReplace Conical Connection PMC		NP	5.0		100544	Type 61
	NobelReplace Conical Connection PMC		NP			100543	Type 60
	NobelReplace Platform Shift		NP			100544	Type 61
	NobelReplace Platform Shift		NP			100544	Type 61
	NobelReplace Platform Shift		NP			100544	Type 61
	NobelReplace Straight Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Straight Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Straight Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100359	Type 12
	NobelReplace Tapered Groovy		NP			100361	Type 13
NUCLEOS	Nucleos T3		NP	3.4		100376	Type 05
	Nucleos T3		NP	3.8		100376	Type 05
	Nucleos T3		NP	4.2		100376	Type 05
	Nucleos T3		NP	5.0		100376	Type 05
	Nucleos T4		NP	3.4		100376	Type 05
	Nucleos T4		NP	3.8		100376	Type 05
	Nucleos T4		NP	4.2		100376	Type 05
	Nucleos T4		NP	5.0		100380	Type 07
	Nucleos T5		NP	3.4		100380	Type 07
	Nucleos T5		NP	3.8		100380	Type 07
	Nucleos T5		NP	4.2		100380	Type 07
	Nucleos T5		NP	5.0		100380	Type 07
OCO BIOMEDICAL	Engage		3.0	3.2		100453	Type 38
	Engage		3.5	4.0		100426	Type 36
	Engage		4.0	5.0		100426	Type 36
	Engage		4.5	6.0		100411	Type 37
	Engage		5.0	7.0		100380	Type 07
	Engage		5.5	8.0		100380	Type 07
	Engage		6.0	9.0		100478	Type 47
	Engage		6.5	10.0		100446	Type 48
	Engage		7.0	11.0		100446	Type 48
	Engage		7.5	12.0		100446	Type 48
	Engage		8.0	13.0		100446	Type 48
	Engage		8.5	14.0		100446	Type 48
OSSEOLINK	OSSEOLINK		3.5	3.5		100402	Type 21
	OSSEOLINK		4.0	4.0		100402	Type 21
	OSSEOLINK		4.5	4.5		100402	Type 21
	OSSEOLINK		5.0	5.0		100402	Type 21
	OSSEOLINK		5.5	5.5		100402	Type 21
	OSSEOLINK		6.0	6.0		100402	Type 21
	OSSEOLINK		6.5	6.5		100402	Type 21
	OSSEOLINK		7.0	7.0		100402	Type 21
	OSSEOLINK		7.5	7.5		100402	Type 21
	OSSEOLINK		8.0	8.0		100402	Type 21
	OSSEOLINK		8.5	8.5		100402	Type 21
	OSSEOLINK		9.0	9.0		100402	Type 21
OSSTEM	OSSTEM		4	4		100402	Type 21
	OSSTEM		4.5	4.5		100402	Type 21
	OSSTEM		5.0	5.0		100402	Type 21
	OSSTEM		5.5	5.5		100402	Type 21
	OSSTEM		6.0	6.0		100402	Type 21
	OSSTEM		6.5	6.5		100402	Type 21
	OSSTEM		7.0	7.0		100402	Type 21
	OSSTEM		7.5	7.5		100402	Type 21
	OSSTEM		8.0	8.0		100402	Type 21
	OSSTEM		8.5	8.5		100402	Type 21
	OSSTEM		9.0	9.0		100402	Type 21
	OSSTEM		9.5	9.5		100402	Type 21
OSTEO-TI	OSTEO-TI		3.5	3.5		100402	Type 21
	OSTEO-TI		4.0	4.0		100402	Type 21
	OSTEO-TI		4.5	4.5		100402	Type 21
	OSTEO-TI		5.0	5.0		100402	Type 21
	OSTEO-TI		5.5	5.5		100402	Type 21
	OSTEO-TI		6.0	6.0		100402	Type 21
	OSTEO-TI		6.5	6.5		100402	Type 21
	OSTEO-TI		7.0	7.0		100402	Type 21
	OSTEO-TI		7.5	7.5		100402	Type 21
	OSTEO-TI		8.0	8.0		100402	Type 21
	OSTEO-TI		8.5	8.5		100402	Type 21
	OSTEO-TI		9.0	9.0		100402	Type 21
OSTEON MEDICAL	OSTEON MEDICAL		3.0	3.0		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		3.5	3.5		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		4.0	4.0		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		4.5	4.5		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		5.0	5.0		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		5.5	5.5		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		6.0	6.0		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		6.5	6.5		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		7.0	7.0		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		7.5	7.5		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		8.0	8.0		100402	Type 21
	OSTEON MEDICAL		8.5	8.5		100402	Type 21
OSTEON IBERIA	OSTEON IBERIA		3.5	3.5		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		4.0	4.0		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		4.5	4.5		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		5.0	5.0		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		5.5	5.5		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		6.0	6.0		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		6.5	6.5		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		7.0	7.0		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		7.5	7.5		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		8.0	8.0		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		8.5	8.5		100402	Type 21
	OSTEON IBERIA		9.0	9.0		100402	Type 21

Применение имплантов	Материал	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartReg	Новое
OXYTECH BERA	K35	N3550107	3.5	5.0	10	100425	Type 26	Now
	K35	N3550117	3.5	5.0	11.5	100425	Type 26	Now
	K35	N3550137	3.5	5.0	13	100425	Type 26	Now
	K35	N3550147	4.1	3.5	8.5	100353	Type 01	Now
	K35	N3550157	4.1	3.5	10	100353	Type 01	Now
	K35	N3550167	4.1	3.5	11.5	100353	Type 01	Now
	K35	N3550177	4.1	3.5	13	100353	Type 01	Now
	K35	N3550187	4.1	3.5	14.5	100353	Type 01	Now
	K35	N3550197	4.1	4.0	6	100353	Type 01	Now
	K35	N3550207	4.1	4.0	8.5	100353	Type 01	Now
	K35	N3550217	4.1	4.0	10	100353	Type 01	Now
	K35	N3550227	4.1	4.0	11.5	100353	Type 01	Now
	K35	N3550237	4.1	4.0	13	100353	Type 01	Now
	K35	N3550247	4.1	4.0	14.5	100353	Type 01	Now
	K35	N3550257	4.1	4.0	16	100353	Type 01	Now
	K35	N3550267	4.1	4.0	18	100353	Type 01	Now
	K35	N3550277	4.1	4.0	20	100353	Type 01	Now
	K35	N3550287	4.1	4.0	22	100353	Type 01	Now
	K35	N3550297	4.1	4.0	24	100353	Type 01	Now
	K35	N3550307	4.1	4.0	26	100353	Type 01	Now
	K35	N3550317	4.1	4.0	28	100353	Type 01	Now
OXY IMPLANT	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100431	Type 27	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100431	Type 27	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	STANDARD	STANDARD			100436	Type 30	Now
	EXTERNAL CONNECTION	MINI	MINI			100436	Type 30	Now
PALTOP	Advanced Classic	20-70034	NP	3.0	10	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70035	NP	3.0	11.5	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70036	NP	3.0	13	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70037	NP	3.0	16	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70038	NP	3.25	10	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70039	NP	3.25	11.5	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70040	NP	3.25	13	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70041	NP	3.25	16	100455	Type 38	Now
	Advanced Classic	20-70042	NP	3.75	10	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70043	NP	3.75	11.5	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70044	NP	3.75	13	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70045	NP	3.75	16	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70046	NP	4.2	6	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70047	NP	4.2	8	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70048	NP	4.2	10	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70049	NP	4.2	11.5	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70050	NP	4.2	13	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70051	NP	4.2	16	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70052	NP	5	6	100480	Type 49	Now
	Advanced Classic	20-70053	NP	5	8	100480	Type 49	Now
PALTOP	Advanced Plus	20-70054	NP	3.0	10	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70055	NP	3.0	11.5	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70056	NP	3.0	13	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70057	NP	3.0	16	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70058	NP	3.25	10	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70059	NP	3.25	11.5	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70060	NP	3.25	13	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70061	NP	3.25	16	100455	Type 38	Now
	Advanced Plus	20-70062	NP	3.75	10	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70063	NP	3.75	11.5	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70064	NP	3.75	13	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70065	NP	3.75	16	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70066	NP	4.2	6	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70067	NP	4.2	8	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70068	NP	4.2	10	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70069	NP	4.2	11.5	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70070	NP	4.2	13	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70071	NP	4.2	16	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70072	NP	5	6	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70073	NP	5	8	100480	Type 49	Now
	Advanced Plus	20-70074	NP	5	10	100480	Type 49	Now

Производитель имплантов	Модель	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartPeg	Новое
SERVO DENTAL	Trias-implant system	33010TRA	Green	3.3	10	100376	Type 06	
	Trias-implant system	33012TRA	Green	3.3	12	100376	Type 06	
	Trias-implant system	33014TRA	Green	3.3	14	100376	Type 06	
	Trias-implant system	33016TRA	Green	3.3	16	100376	Type 06	
	Trias-implant system	44008TRA	Red	4.4	8	100376	Type 06	
	Trias-implant system	44010TRA	Red	4.4	10	100376	Type 06	
	Trias-implant system	44012TRA	Red	4.4	12	100376	Type 06	
	Trias-implant system	44014TRA	Red	4.4	14	100376	Type 06	
	Trias-implant system	44016TRA	Red	4.4	16	100376	Type 06	
	Trias-implant system	36008TRA	Yellow	3.6	8	100376	Type 06	
	Trias-implant system	36010TRA	Yellow	3.6	10	100376	Type 06	
	Trias-implant system	36012TRA	Yellow	3.6	12	100376	Type 06	
	Trias-implant system	36014TRA	Yellow	3.6	14	100376	Type 06	
	Trias-implant system	36016TRA	Yellow	3.6	16	100376	Type 06	
	Trias-implant system							
	Trias-implant system							
SGS DENTAL	3.75 PLATFORM					100431	Type 27	
	CONICAL D					100431	Type 27	
SHIN-HUNG	Luna		NP	3.5		100376	Type 05	
	Luna		IP	4.0		100478	Type 47	
	Luna		IP	4.5		100478	Type 47	
	Luna		IP	5.0		100478	Type 47	
	Sola		NP	3.5		100355	Type 02	
	Sola		IP	4.0		100353	Type 01	
	Sola		IP	4.5		100353	Type 01	
	Sola		WP	5.0		100357	Type 03	
	Stella		IP	4.0		100544	Type 61	
	Stella		IP	4.5		100544	Type 61	
	Stella		WP	4.5		100544	Type 61	
	Stella		WP	5.0		100544	Type 61	
SHOFU	BFJMP30-OSTL			3.0		100545	Type 62	
	BFJMP35-OSTL			3.5		100404	Type 22	
	BFJMP40-OSTL			4.0		100543	Type 60	
SIC IMPLANT SYSTEM	Ace			3.4		100466	Type 44	
	Ace			4.0		100466	Type 44	
	Ace			5.0		100466	Type 44	
SOUTHERN IMPLANTS	External Hex		BA	5.0		100353	Type 01	
	External Hex		MAX-7	7.0		100353	Type 01	
	External Hex		MAX-8	8.0		100353	Type 01	
	External Hex		MAX-9	9.0		100353	Type 01	
	External Hex		Piccolo	3.0		100355	Type 02	
	Extra-oral		IB	3.75		100353	Type 01	
	IT Connection		4.8mm	4.8		100350	Type 04	
	IT Connection		6.0mm	6.0		100350	Type 04	
	IT Connection MAX-IT			7.0		100380	Type 07	
	IT Connection MAX-IT			8.0		100380	Type 07	
	IT Connection MAX-IT			9.0		100380	Type 07	
	Tri-nex		Tri-MAX-7	7.0		100412	Type 24	
	Tri-nex		Tri-MAX-8	8.0		100462	Type 40	
	Tri-nex		Tri-MAX-9	9.0		100462	Type 40	
	Tri-nex Connection			3.5		100359	Type 12	
	Tri-nex Connection			4.3		100361	Type 13	
	Tri-nex Connection			5.0		100361	Type 13	
	Tri-nex Connection			6.0		100361	Type 13	
STERNGOLD DENTAL	External Hexagon		IP	3.75		100353	Type 01	
	External Hexagon		IP	4.0		100353	Type 01	
	External Hexagon		IP	5.0		100353	Type 01	
	Stem IC Internal Octagon		IN	4.1		100350	Type 04	
STRAUMANN	BLX Roxolid SL Active	061.3308	RB	3.5	8	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.3310	RB	3.5	10	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.3312	RB	3.5	12	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.3314	RB	3.5	14	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.3316	RB	3.5	16	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.3318	RB	3.5	18	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.4306	RB	3.75	6	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.4308	RB	3.75	8	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.4310	RB	3.75	10	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.4312	RB	3.75	12	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.4314	RB	3.75	14	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.4316	RB	3.75	16	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.4318	RB	3.75	18	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.5306	RB	4.0	6	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.5308	RB	4.0	8	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.5310	RB	4.0	10	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.5312	RB	4.0	12	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.5314	RB	4.0	14	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.5316	RB	4.0	16	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.5318	RB	4.0	18	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.6306	RB	4.5	6	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.6308	RB	4.5	8	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.6310	RB	4.5	10	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.6312	RB	4.5	12	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.6314	RB	4.5	14	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.6316	RB	4.5	16	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.6318	RB	4.5	18	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.7306	WB	5.0	6	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.7308	WB	5.0	8	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.7310	WB	5.0	10	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.7312	WB	5.0	12	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.7314	WB	5.0	14	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.7316	WB	5.0	16	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.7318	WB	5.0	18	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.8306	WB	5.5	6	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.8308	WB	5.5	8	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.8310	WB	5.5	10	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.8312	WB	5.5	12	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.9306	WB	6.5	6	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.9308	WB	6.5	8	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.9310	WB	6.5	10	100455	Type 38	
	BLX Roxolid SL Active	061.9312	WB	6.5	12	100455	Type 38	
	Bone Level Implants Roxolid SL Active		NC	3.3		100484	Type 53	
	Bone Level Implants Roxolid SL Active		RC	4.1		100485	Type 54	
	Bone Level Implants Roxolid SL Active		RC	4.8		100485	Type 54	
	Bone Level Implants Titanium SLA		NC	3.3		100484	Type 53	
	Bone Level Implants Titanium SLA		RC	4.1		100485	Type 54	
	Bone Level Implants Titanium SLA		RC	4.8		100485	Type 54	
	Bone Level Tapered Implants Roxolid SLA	021.3508	NC	3.3	8	100484	Type 53	
	Bone Level Tapered Implants Roxolid SLA	021.3510	NC	3.3	10	100484	Type 53	
	Bone Level Tapered Implants Roxolid SLA	021.3512	NC	3.3	12	100484	Type 53	
	Bone Level Tapered Implants Roxolid SLA	021.3514	NC	3.3	14	100484	Type 53	
	Bone Level Tapered Implants Roxolid SLA	021.3516	NC	3.3	16	100484	Type 53	

NEW Новые имплантаты добавлены в список

* Добавлена дополнительная информация об имплантате, например, номер каталога, длина и т. д.

** Изменен тип SmartPeg.

[illegible]

SURGIKON

[illegible]

“NEW” Новые экземпляры добавлены в список
• Добавлена дополнительная информация об экземпляре, например, номер
каталога, автора и т. д.
• Изменен тип SmartP-eg.

Прокладывает имплантат	Материал	Каталог №	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	Smarting	Новое
SUPRACOR	Solution Cervical Connection		Conv	5	8,5	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	5	10	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	5	11,5	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	5	13	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	5	15	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	6	8,5	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	6	10	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	6	11,5	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	6	13	100544	Type 61	Новое
	Solution Cervical Connection		Conv	6	15	100544	Type 61	Новое
SWEDEN & MARTINA	Global			3,8		100380	Type 07	
	Global			4,3		100475	Type 48	
	Global			4,8		100475	Type 48	
	Global			5,5		100475	Type 48	
	Kelme			3,8		100440	Type 32	
	Kelme			4,25		100380	Type 07	
	Kelme			5,0		100380	Type 07	
	Premium			4,25		100380	Type 07	
	Premium new			5,0		100380	Type 07	
	Premium new			3,3		100440	Type 32	
SYBLON	Endospine External			3,3		100402	Type 21	
	Endospine External			3,5		100436	Type 20	
	Endospine External			4,1		100353	Type 01	
	Endospine External			5,0		100353	Type 01	
	Endospine External			3,25		100353	Type 01	
	Endospine External			4,0		100353	Type 01	
	Endospine External			4,0		100412	Type 24	
	Endospine External			4,9		100412	Type 24	
	Endospine External			3,3		100378	Type 06	
	Endospine External			3,5		100378	Type 06	
TAG DENTAL	Ass			4,1		100378	Type 06	
	Ass			3,3		100431	Type 27	
	Ass			3,75		100431	Type 27	
	Ass			4,2		100431	Type 27	
	Ass			5,0		100431	Type 27	
	Ass			6,0		100431	Type 27	
	Ass			3,75		100431	Type 27	
	Ass			4,2		100431	Type 27	
	Ass			5,0		100431	Type 27	
	Ass			6,0		100431	Type 27	
TAR	External Hexagon			3,3		100353	Type 01	
	External Hexagon			3,5		100394	Type 18	
	External Hexagon			3,2		100402	Type 21	
	External Hexagon			3,9		100402	Type 21	
	External Hexagon			4,7		100402	Type 21	
	External Hexagon			3,2		100402	Type 21	
	External Hexagon			3,5		100402	Type 21	
	External Hexagon			4,7		100402	Type 21	
	External Hexagon			3,3		100402	Type 21	
	External Hexagon			3,5		100402	Type 21	
TEORA	Internal Hexagon			3,3		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			3,5		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			3,2		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			3,9		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			4,7		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			3,2		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			3,5		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			4,7		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			3,3		100402	Type 21	
	Internal Hexagon			3,5		100402	Type 21	
THOMSEN MEDICAL	SPI System Platform			3,3		100425	Type 28	
	SPI System Platform			3,75		100425	Type 28	
	SPI System Platform			4,2		100425	Type 28	
	SPI System Platform			5,0		100425	Type 28	
	SPI System Platform			3,3		100425	Type 28	
	SPI System Platform			3,75		100425	Type 28	
	SPI System Platform			4,2		100425	Type 28	
	SPI System Platform			5,0		100425	Type 28	
	SPI System Platform			3,3		100425	Type 28	
	SPI System Platform			3,75		100425	Type 28	
TICARE	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	
	INEX			5,0		100380	Type 07	

Производитель имплантов	Модель	Каталог No	Платформа	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartReg	Новое
TICARE	OSSEOUS	14615011	Mini	5.0	11.5	100357	Туре 03	
	OSSEOUS	14615013	Mini	5.0	13	100357	Туре 03	
	OSSEOUS	14615015	Mini	5.0	15	100357	Туре 03	
	OSSEOUS	14615406	Mini PS	5.0	6	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14615408	Mini PS	5.0	8	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14615410	Mini PS	5.0	10	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14615411	Mini PS	5.0	11.5	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14615413	Mini PS	5.0	13	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14615415	Mini PS	5.0	15	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613310	Mini	3.3	10	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613311	Mini	3.3	11.5	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613313	Mini	3.3	13	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613315	Mini	3.3	15	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613410	Standard	3.4	10	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613411	Standard	3.4	11.5	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613413	Standard	3.4	13	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613415	Standard	3.4	15	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613708	Standard	3.75	8	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613710	Standard	3.75	10	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613711	Standard	3.75	11.5	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613713	Standard	3.75	13	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613715	Standard	3.75	15	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613718	Standard	3.75	18	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14613720	Standard	3.75	20	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14614208	Standard	4.25	8	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14614210	Standard	4.25	10	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14614211	Standard	4.25	11.5	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14614213	Standard	4.25	13	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14614215	Standard	4.25	15	100353	Туре 01	
	OSSEOUS	14614218	Standard	4.25	18	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16613708	Standard	3.75	8	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16613710	Standard	3.75	10	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16613711	Standard	3.75	11.5	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16613713	Standard	3.75	13	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16613715	Standard	3.75	15	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16614208	Standard	4.25	8	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16614210	Standard	4.25	10	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16614211	Standard	4.25	11.5	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16614213	Standard	4.25	13	100353	Туре 01	
	OSSEOUS QUATTRO	16614215	Standard	4.25	15	100353	Туре 01	
TIDAL SPIRAL				3.75		100431	Туре 27	
				4.2		100431	Туре 27	
				5.0		100431	Туре 27	
				6.0		100431	Туре 27	
TRATE	Rootform			4.0		100497	Туре 57	
TRI DENTAL IMPLANTS	TRI-Narrow	TN33M10		3.2	10	100480	Туре 43	
	TRI-Narrow	TN33M11		3.2	11	100480	Туре 43	
	TRI-Narrow	TN33M13		3.2	13	100480	Туре 43	
	TRI-Narrow	TN33M16		3.2	16	100480	Туре 43	
	TRI-Octa 4.8			3.75		100544	Туре 61	
	TRI-Octa 4.8			4.1		100544	Туре 61	
	TRI-Octa 4.8			4.7		100544	Туре 61	
	TRI-Vent			3.5		100440	Туре 32	
U-IMPL	External Hex					100353	Туре 01	
	Internal Hex					100440	Туре 32	
WARANTEC	IU Implant		Mini	3.6	8.5	100543	Туре 60	
	IU Implant		Mini	3.6	10	100543	Туре 60	
	IU Implant		Mini	3.6	11.5	100543	Туре 60	
	IU Implant		Mini	3.6	13	100543	Туре 60	
	Oneplant Implant			4.3		100412	Туре 24	
	Oneplant Internal Tapered					100378	Туре 06	
WEGO				3.4	9	100484	Туре 53	
				4.3	7	100455	Туре 38	
				4.3	9	100411	Туре 23	
WIELAND IMPLANT SYSTEM				3.5		100472	Туре 45	
				4.3		100472	Туре 45	
				5.0		100472	Туре 45	
WINSIX	KIMPLANT	33009K/MRS	Green	3.3	9	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	33011K/MRS	Green	3.3	11	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	33013K/MRS	Green	3.3	13	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	33015K/MRS	Green	3.3	15	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	52009K/MRS	Grey	5.2	9	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	52011K/MRS	Grey	5.2	11	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	52013K/MRS	Grey	5.2	13	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	52015K/MRS	Grey	5.2	15	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	45009K/MRS	Red	4.5	9	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	45011K/MRS	Red	4.5	11	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	45013K/MRS	Red	4.5	13	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	45015K/MRS	Red	4.5	15	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	38009K/MRS	Yellow	3.8	9	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	38011K/MRS	Yellow	3.8	11	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	38013K/MRS	Yellow	3.8	13	100376	Туре 05	
	KIMPLANT	38015K/MRS	Yellow	3.8	15	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	38009KE/MRS	Green	3.8	9	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	38011KE/MRS	Green	3.8	11	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	38013KE/MRS	Green	3.8	13	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	38015KE/MRS	Green	3.8	15	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	52009KE/MRS	Red	5.2	9	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	52011KE/MRS	Red	5.2	11	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	52013KE/MRS	Red	5.2	13	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	52015KE/MRS	Red	5.2	15	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	45009KE/MRS	Yellow	4.5	9	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	45011KE/MRS	Yellow	4.5	11	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	45013KE/MRS	Yellow	4.5	13	100376	Туре 05	
	KE IMPLANT	45015KE/MRS	Yellow	4.5	15	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	52007KT/MRS	Blue	5.2	7	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	52009KT/MRS	Blue	5.2	9	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	52011KT/MRS	Blue	5.2	11	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	52013KT/MRS	Blue	5.2	13	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	52015KT/MRS	Blue	5.2	15	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	59007KT/MRS	Bronze	5.9	7	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	59009KT/MRS	Bronze	5.9	9	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	59011KT/MRS	Bronze	5.9	11	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	59013KT/MRS	Bronze	5.9	13	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	45007KT/MRS	Grey	4.5	7	100376	Туре 05	
	KT IMPLANT	45009KT/MRS	Grey	4.5	9	100376	Туре 05	

NEW Новые имплантаты добавлены в список

* Добавлена дополнительная информация об имплантатах, например, номер

каталога, длина и т. д.

** Изменен тип SmartReg.

Абатменты

Производитель имплантата	Модель	Каталог No	Платформа	Угол	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Art. No	SmartPeg	Имена
BIOHORIZONS	MUA						100415	Type 25	
SAMLOG	Comfour Bar abutment		Blue		5.0		100580	Type 74	
	Comfour Bar abutment		Purple		4.3		100579	Type 73	
	Comfour Bar abutment		Yellow		3.8		100579	Type 73	
CSCHEAR	Baha BA 210					5.5	100487	Type 55	
	Baha BA 210					8.5	100487	Type 55	
	Baha BA 300, BIA 300					6.0	100487	Type 55	
	Baha BA 400, BIA 400					9.0	100487	Type 55	
	Baha BA 400, BIA 400					6.0	100487	Type 55	
	Baha BA 400, BIA 400					8.0	100487	Type 55	
	Baha BA 400, BIA 400					10.0	100487	Type 55	
	Baha BA 400, BIA 400					12.0	100487	Type 55	
	Baha BA 400, BIA 400					14.0	100487	Type 55	
	Vistafix Standard abutment					3.0	100363	Type A3	
	Vistafix Standard abutment					4.0	100363	Type A3	
	Vistafix Standard abutment					5.5	100363	Type A3	
	Vistafix Standard abutment					7.0	100363	Type A3	
	Vistafix VXA 300					3.5	100363	Type A3	
	Vistafix VXA 300					4.5	100363	Type A3	
	Vistafix VXA 300					6.0	100363	Type A3	
	Vistafix VXA 300					7.5	100363	Type A3	
GALIMPLANT	MUSLA						100580	Type 74	
NEOSS	Accost abutment						100483	Type 52	
NOBEL BIO CARE	Brånemark system MUA		NP				100363	Type A3	
	Brånemark system MUA		SP				100363	Type A3	
	Brånemark system MUA		WP				100390	Type 17	
	Mua		NP				100415	Type 25	
	Mua		RP				100415	Type 25	
	Mua		WP				100415	Type 25	
	On1 Base CC		NP				100579	Type 73	
	On1 Base CC		RP				100579	Type 73	
OTICON MEDICAL	Porto Implant abutment					4.0	100487	Type 55	
STRAUMANN	Coping for screw-retained abutment, Ti Bridge	022.2749	NC		3.5		100415	Type 25	
	Coping for screw-retained abutment, Ti Bridge	022.4751	NC/NC		4.6		100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.2749	NC	17	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.2751	NC	30	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.2755	NC	17	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.2757	NC	30	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.0010	NC	17	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.0012	NC	30	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.4747	RC	17	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.4749	RC	30	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.4752	RC	17	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.4754	RC	30	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.0014	RC	17	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type A	022.0016	RC	30	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.2750	NC	17	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.2752	NC	30	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.2756	NC	17	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.2758	NC	30	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.0011	NC	17	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.0013	NC	30	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.4748	RC	17	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.4750	RC	30	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.4753	RC	17	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.4755	RC	30	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.0015	RC	17	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, angled, Type B	022.0017	RC	30	4.6	5.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.2745	NC	0	3.5	1	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.2746	NC	0	3.5	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.2753	NC	0	3.5	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.2747	NC	0	4.6	1	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.2748	NC	0	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.2754	NC	0	4.6	4	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.4745	RC	0	4.6	1	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.4746	RC	0	4.6	2.5	100415	Type 25	
	Screw-retained abutment, TAN, straight	022.4751	RC	0	4.6	4	100415	Type 25	
THORNHORN MEDICAL	SP1 System Bar abutment						100447	Type 36	
	VARIOmulti abutment						100415	Type 25	



A fresh start every time!

To avoid damage to the implant, the SmartPeg material is quite soft, which limits the lifetime of the threads.

Therefore, SmartPegs are single use items.

Please visit www.osstell.com/smartpegguide/ to get the latest SmartPeg Reference Guide, as it is regularly updated.



Каждый раз новый старт!

Чтобы избежать повреждения имплантата, материал SmartPeg достаточно мягкий, что ограничивает срок службы резьбы. Таким образом, SmartPeg являются предметами одноразового использования.

Посетите www.osstell.com/smartpegguide/, чтобы получить последнюю версию Справочного руководства SmartPeg, так как оно регулярно обновляется.

* "NEW" Новые имплантаты добавлены в список

** Добавлена дополнительная информация об имплантатах, например, номер

каталогов, длина и т. д.

*** Изменен тип SmartPeg.

Перевод с английского языка на русский язык

Утверждаю
Управляющий директор
Осстелл АБ
/подпись/ Джонас Эинджер

Гётеборг, 27 января 2022 года

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Устройство портативное для неинвазивного измерения стабильности
дентальных имплантатов Osstell Beacon**

производства Осстелл АБ, Швеция

НОТАРИУС / ГЁТЕБОРГ

Я, нижеподписавшийся, АКСЕЛ ВЕЙБУЛЛ, нотариус города Гётеборг, Швеция
настоящим заявляю,

что

Курт Джонас Эинджер лично подписал настоящий документ, и

что

в соответствии с электронным Сертификатом о Регистрации, выданным Бюро
Регистрации Шведских компаний, датированным 27-м января 2022 года, он является
Управляющим директором шведской компании **Осстелл АБ** – с Рег. № **556612-4938**, и

что

в соответствии со Шведским Законом о Компаниях и как Управляющий директор
должным образом уполномочен вести деятельность и подписывать документы за и от
имени компании по вопросам текущей деятельности компании.

Гётеборг, 27-е января 2022 г.

По должности:

[Круглая печать]: НОТАРИУС*ГЁТЕБОРГ

/подпись/


Аксел Вейбулл

Номер нотариального заверения: 501

Дроттнингатан 38/Ящик 11911,404 39 Гётеборг. Тел: 031-7991090, Эл. почта: notarius.publicus@lindahl.se

Далее текст на русском языке.

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком Зацепиной Надеждой Николаевной. Знание вышеуказанных языков подтверждаю.

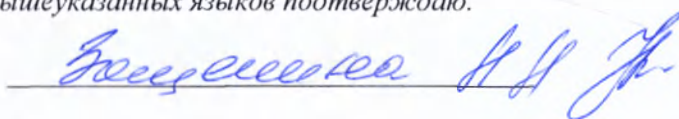

Российская Федерация

Город Москва.

Тридцатого марта две тысячи двадцать второго года.

Я, Алехин Евгений Владимирович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Зацепиной Надежды Николаевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 57/171-н/77-2022- 4-4529.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 рублей 00 копеек.


Е.В. Алехин

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью на 46 листах(ов)


Е.В. Алехин

