





Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вк тип «Вакон»:

1,67мм (05F/Ch)×500мм; 2,00мм (06F/Ch)×500мм; 2,67мм (08F/Ch)×500мм; 3,33мм (10F/Ch)×500мм; 4,00мм (12F/Ch)×500мм; 4,67мм (14F/Ch)×500мм; 5,33мм (16F/Ch)×500мм; 6,00мм (18F/Ch)×500мм; 6,67мм (20F/Ch)×500мм

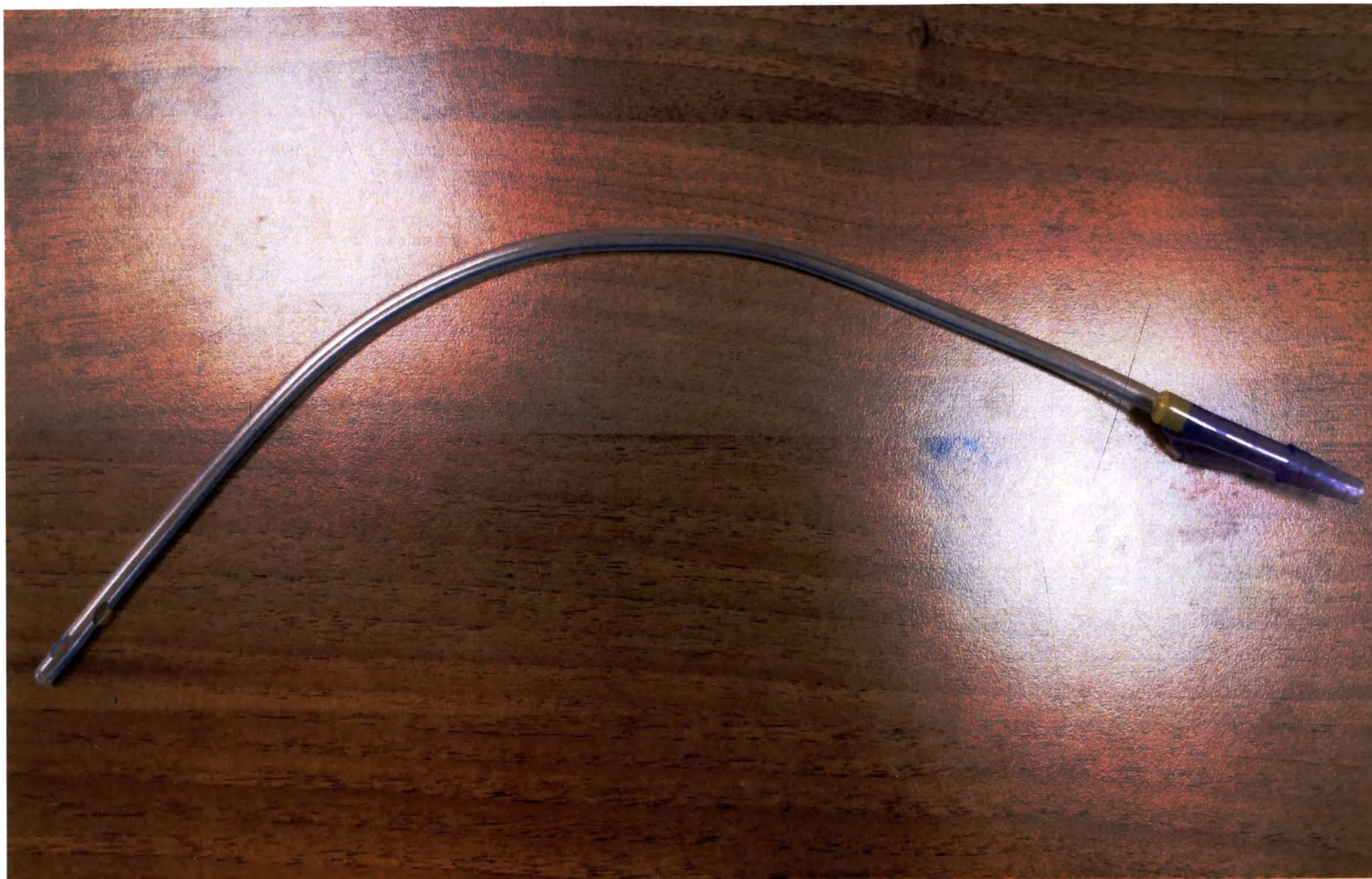

Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вк тип «Вакон»:

1,67мм (05F/Ch)×500мм; 2,00мм (06F/Ch)×500мм; 2,67мм (08F/Ch)×500мм; 3,33мм (10F/Ch)×500мм; 4,00мм (12F/Ch)×500мм; 4,67мм (14F/Ch)×500мм; 5,33мм (16F/Ch)×500мм; 6,00мм (18F/Ch)×500мм; 6,67мм (20F/Ch)×500мм в упаковке

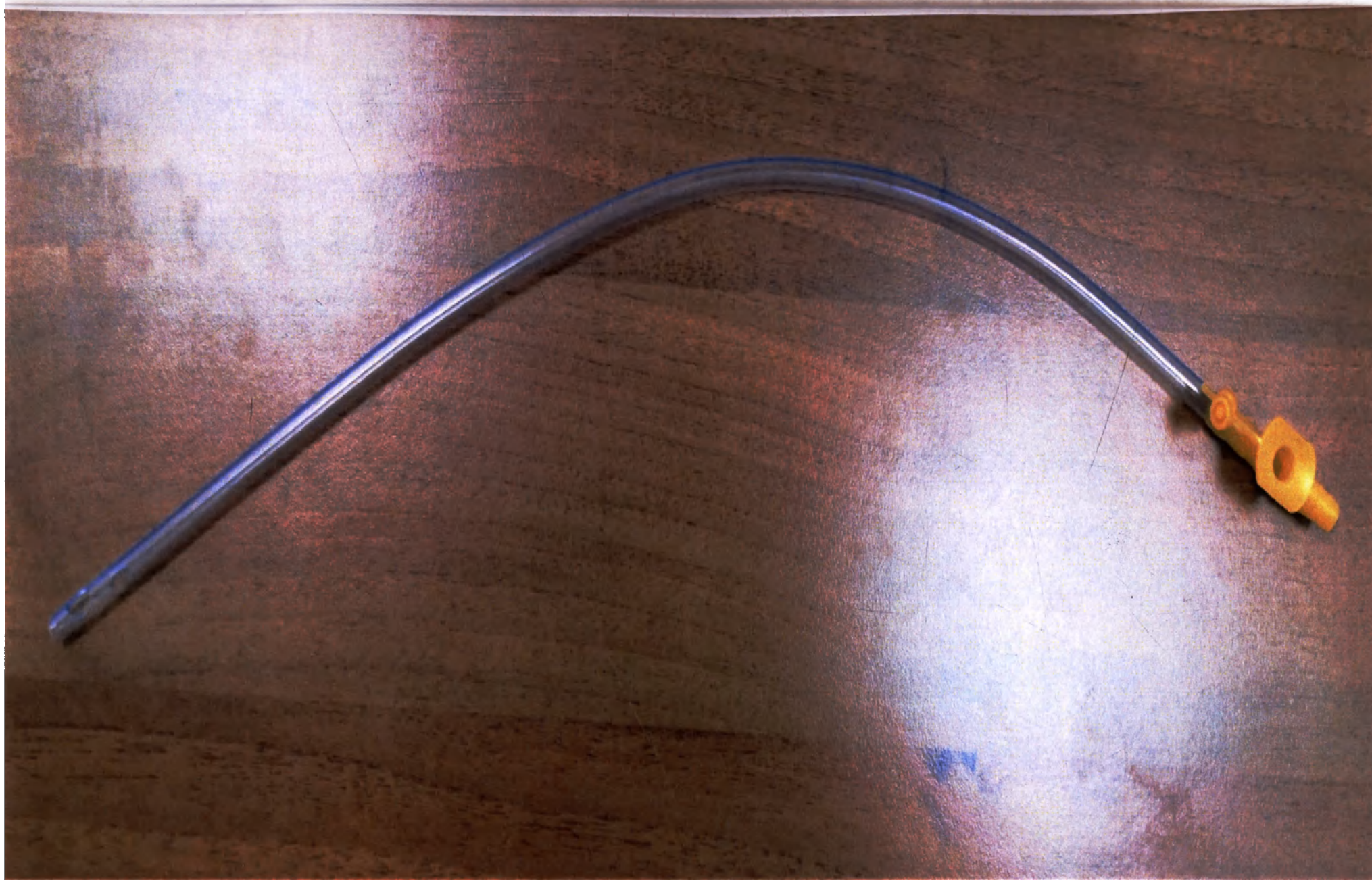

Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вк тип «Калкон»:

1,67мм (05F/Ch)×500мм; 2,00мм (06F/Ch)×500мм; 2,67мм (08F/Ch)×500мм; 3,33мм (10F/Ch)×500мм; 4,00мм (12F/Ch)×500мм; 4,67мм (14F/Ch)×500мм; 5,33мм (16F/Ch)×500мм; 6,00мм (18F/Ch)×500; 6,67мм (20F/Ch)×500мм



Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вк тип «Капкон»:

1,67мм (05F/Ch)×500мм; 2,00мм (06F/Ch)×500мм; 2,67мм (08F/Ch)×500мм; 3,33мм (10F/Ch)×500мм; 4,00мм (12F/Ch)×500мм; 4,67мм (14F/Ch)×500мм; 5,33мм (16F/Ch)×500мм; 6,00мм (18F/Ch)×500; 6,67мм (20F/Ch)×500мм в упаковке

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 5 листов
ООО «Юникорнмед»
Генеральный директор Осипов Д.Ю.

Подпись _____

«24» ноября 2021 г.



ОКПД2 32.50.13.110

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Юникормед»

Д.Ю. Осипов

«29» августа 2022 г.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Зонд аспирационный стерильный, одноразовый
с краткой инструкцией на упаковке,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-69171175-2021**

Производства: ООО «Юникормед», Россия
188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380

Санкт-Петербург
2022

Макет маркировки зонда с вакуум-контролем тип «Вакон»:

Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-69171175-2021: Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип «Вакон» 1,67мм (05F/Ch)×500мм с краткой инструкцией на упаковке в составе: 1) Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип «Вакон» 1,67мм (05F/Ch)×500мм – 1 шт.		АРТИКУЛ: ***** LOT 160819 2019-08 2024-07 	
ООО «Уникормед» Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, Мельничная д.18 лит.А info@unicmed.ru Место производства: 188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380	• Стерилизовано оксидом этилена • Не токсично • Для однократного применения • Не использовать при нарушении целостности упаковки • Хранить в сухом, проветриваемом защищенном от света месте при комнатной температуре		 СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б)
РУ №			
НАЗНАЧЕНИЕ: для аспирации секрета из бронхов, трахей, полости рта и носа, санации просвета эндотрахеальных и трахеостомических трубок. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗМЕЩЕНА НА https://unicmed.ru/instructions): Показания к применению: • затрудненное дыхание; • скопление секрета в бронхах, трахее, полости рта и носа; • скопление секрета в эндотрахеальных и трахеостомических трубках; • затрудненное откашливание секрета, при его скоплении; • отсутствие возможности откашливания секрета, при его скоплении после хирургического вмешательства. Противопоказания к применению: • индивидуальная непереносимость материалов, используемых при изготовлении зондов. Возможные побочные действия: • аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие и его составные части. ПОДГОТОВКА: проверьте целостность упаковки и срок годности изделия; наденьте перчатки после мытья рук; аккуратно вскройте упаковку; извлеките зонд, не нарушая его стерильность; приступите к работе. При использовании зонда должна применяться техника безопасности. При вводе в глотку отсос жидкости должен быть включен. Аспирация жидкости может осуществляться только с интервалами в 10-15 секунд. Диаметр зонда должен быть на миллиметр меньше диаметра отверстия, в которое он будет введен. Данная мера предосторожности применяется для того, чтобы пациент во время проведения процедуры не задыхался. ВВЕДЕНИЕ: соблюдая правила асептики, осторожно вводите трубку зонда, не прилагая чрезмерных усилий во избежание травм; подсоедините зонд к хирургическому отсосу при помощи коннектора; произведите аспирацию; с помощью вакуум-контроллера регулируйте степень создаваемого разрежения прижатием большого пальца отверстия вакуум-контроллера для снижения риска травмирования тканей пациента; после окончания процедуры аккуратно извлеките и утилизируйте зонд. Зондирование длится около 10-15 секунд.			

Макет маркировки зонда с вакуум-контролем тип «Капкон»:

Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-003-69171175-2021:

Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип «Капкон» 1,67мм (05F/Ch)×500мм
с краткой инструкцией на упаковке в составе:

1) Зонд аспирационный стерильный, одноразовый с вакуум-контролем тип «Капкон» 1,67мм (05F/Ch)×500мм – 1 шт.

АТИКУЛ: *****

LOT 160819 2019-08 2024-07



ООО «Юникормед»

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, Мельничная д.18 лит.А info@unicmed.ru

Место ООО «Юникормед»

производства: 188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380

- Стерилизовано оксидом этилена
- Не токсично
- Для однократного применения
- Не использовать при нарушении целостности упаковки
- Хранить в сухом, проветриваемом защищенном от света месте при комнатной температуре



СанПиН 2.1.3684-21
(класс Б)

РУ №

НАЗНАЧЕНИЕ: для аспирации секрета из бронхов, трахей, полости рта и носа, санации просвета эндотрахеальных и трахеостомических трубок.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗМЕЩЕНА НА <https://unicmed.ru/instructions>):

Показания к применению:

- затрудненное дыхание;
- скопление секрета в бронхах, трахеи, полости рта и носа;
- скопление секрета в эндотрахеальных и трахеостомических трубках;
- затрудненное откашливание секрета, при его скоплении;
- отсутствие возможности откашливания секрета, при его скоплении после хирургического вмешательства.

Противопоказания к применению:

- индивидуальная непереносимость материалов, используемых при изготовлении зондов.

Возможные побочные действия:

- аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие и его составные части.

ПОДГОТОВКА: проверьте целостность упаковки и срок годности изделия; наденьте перчатки после мытья рук; аккуратно вскройте упаковку; извлеките зонд, не нарушая его стерильность; приступите к работе.

При использовании зонда должны применяться техники безопасности. При вводе в глотку отсос жидкости должен быть выключен. Аспирация жидкости может осуществляться только с интервалами в 10-15 секунд. Диаметр зонда должен быть noticeably меньше диаметра отверстия, в которое он будет введен. Данная мера предосторожности применяется для того, чтобы пациент во время проведения процедуры не задыхался.

ВВЕДЕНИЕ: соблюдая правила асептики, осторожно вводите трубку зонда, не прилагайте чрезмерных усилий во избежание травм; подсоедините зонд к хирургическому отсосу при помощи коннектора; производите аспирацию; с помощью вакуум-контроллера регулируйте степень создаваемого разрежения прижатием большого пальца или заглушки отверстия вакуум-контроллера для снижения риска травмирования тканей пациента; после окончания процедуры аккуратно извлеките и утилизируйте зонд. Зондирование длится около 10-15 секунд.

Прошито, пронумеровано и
Скреплено 3 листов
ООО «Юникорнмед»
Генеральный директор Осидов Д. Ю.

Подпись

«29» августа 2022

