

Форма инструкции по применению изделия

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200_г. № _____



Сорокин В.В.
200 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОНТЕЙНЕРА-ТАРЫ ДЛЯ СБОРА БИОМАТЕРИАЛА _____ (наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

* Контейнер-тара для сбора биоматериала предназначен для взятия, сбора, хранения, транспортирования биоматериала (кал, моча, мокрота и т.д.). Для каждого вида анализа применять правила сбора биоматериала.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

* Контейнеры-тара для сбора биоматериала представляют собой ёмкости (баночки) из полипропилена с завинчивающимися крышками в трёх исполнениях по 120мл., 60мл., 30мл., (на конт. 120мл. нанесена мерная шкала). В контейнере 30 мл. встроена ложка-шпатель в крышку.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

* не использовать изделие вблизи открытого огня;

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:

* Перед применением контейнер-тару для сбора биоматериала визуально проверить на герметичность, отсутствие трещин, качество сварки донного шва.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

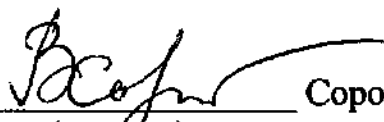
* Перед сбором биоматериала открыть крышку по резьбовому соединению против часовой стрелки, поместить биоматериал в основной корпус, закрыть крышку по резьбовому соединению по часовой стрелке.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

* При соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации гарантийный срок изделия - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Хранение контейнеров-тар для сбора биоматериала должно производиться в закрытых складских помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивной среды (кислоты, щелочи и т.п.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Контейнеры-тара для сбора биоматериала должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Должность ответственного за
производство


(подпись) Сорокин В.В.

