

서울특별시 중구 퇴계로 131,
202호(신일빌딩)
[별지 제41호서식]

공증인 김학성 사무소

(전화) 02-779-5581~2
(팩스) 02-779-5584

Registered No. 2021 - 12641

NOTARIAL CERTIFICATE

KIM HAK SUNG NOTARY OFFICE

#202,131, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea



210mm X 297mm
보존용지(1종) 70g/m²

«УТВЕРЖДАЮ» / "APPROVE"

HASS Corporation/ ХАСС Корпорэйшн

President & CEO

HASS Corporation
(должность/position)
77-14 GWAHAKDANUJI-RO GANGWON-DO, KOREA
Yongsu Kim

(имя/name)


(подпись/signature)

«_ 8 _» December 2021 г.

«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)



Instruction for use for medical device

Инструкция по применению на медицинское изделие

Материалы стоматологические реставрационные Amber

производства

«HASS Corporation»
(«ХАСС Корпорэйшн»), Korea

2021г.

SAME AS ORIGINAL



1. Наименование медицинского изделия

Материалы стоматологические реставрационные Amber (см. Приложение 1)

2. Сведения о производителе медицинского изделия

Разработчик:

«HASS Corporation» («ХАСС Корпорэйшн»), Korea, Korea
77-14 Gwahakdanji-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea.
Телефон: +82-70-7712-1300
Электронная почта: hasscorp@hassbio.com

Производитель:

«HASS Corporation» («ХАСС Корпорэйшн»), Korea, Korea
77-14 Gwahakdanji-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea.
Телефон: +82-70-7712-1300
Электронная почта: hasscorp@hassbio.com

Место производства медицинского изделия:

«HASS Corporation» («ХАСС Корпорэйшн»), Korea, Korea
77-14 Gwahakdanji-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea.
Телефон: +82-70-7712-1300
Электронная почта: hasscorp@hassbio.com

3. Назначение

Материалы стоматологические реставрационные Amber предназначены для изготовления стоматологических стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, индивидуальные абатменты, с использованием систем CAD/CAM и техники прессования.

4. Область/условия применения

Материалы стоматологические реставрационные Amber применяются в стоматологии.

Данное медицинское изделие применяется только в условиях лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений, зуботехнических лабораторий.

SAME AS ORIGINAL

5. Показание к применению

Изготовление стоматологических стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, индивидуальные абатменты, с использованием систем CAD/CAM и техники прессования. Используется только специально обученным медицинским персоналом, зубными техниками.

6. Противопоказания к применению

Не использовать блоки из стеклокерамики при наличии одной из следующих ситуаций:

- Изготовление мостовидных протезов в дистальной области, доходящие до области моляров;
- Мостовидные протезы из 4-х и более единиц;
- Мостовидные протезы с вкладкой;
- Очень глубокое поддесневое препарирование;
- Бруксизм;
- Консольные мостовидные протезы/приставные элементы;
- Мостовидные протезы типа «Мэриленд»;
- Любое другое использование, не указанное в показаниях.

7. Меры предосторожности

Для блоков для техники фрезерования

- Действуйте аккуратно, чтобы не повредить фрезерный инструмент CAD/CAM оборудования при прикреплении или отсоединении изделия.
- Будьте осторожны, чтобы не прищемить руку фрезерным инструментом.
- Держатель должен быть закреплен в точном месте.
- Удалите пыль, которая может образоваться во время работы CAD/CAM оборудования.
- Не роняйте изделие на пол и не кладите на него тяжелые предметы, так как это может повредить изделие.
- Храните изделие в недоступном для младенцев и детей месте.
- С изделием должен работать зубной техник.

Для блоков для техники прессования

- Будьте осторожны при помещении блока в опоку, остерегайтесь ожогов.
- Убедитесь в том, что плунжер очищен и установлен в правильном положении.
- Помещение опоки с блоком и плунжера в печь должно происходить максимально быстро.
- После прессования охладите опоку до комнатной температуры.
- Следите за тем, чтобы не вдыхать пыль во время процесса распаковки, и контролируйте количество отходов.
- Будьте осторожны при работе с разделительным диском, следите за тем, чтобы он не повредил отпрессованное изделие при извлечении из опоки.
- С изделием должен работать зубной техник.

SAME AS ORIGINAL

Хранение и обращение с изделием перед использованием.

Храните изделие при комнатной температуре в сухом месте.

Упакуйте и храните изделие должным образом, чтобы не повредить его.

Храните изделие при температуре от 0°C ~ 40°C, при относительной влажности 10% ~ 90%, атмосферном давлении в диапазоне 500 гПа до 1060 гПа.

8. Возможные побочные эффекты

Если известно, что у пациента наблюдается аллергическая реакция на какой-либо из компонентов продукта серии Amber, этот материал нельзя использовать для изготовления реставраций

9. Условия применения и потенциальные пользователи

Материалы стоматологические реставрационные Amber применяются в стоматологии.

Стоматологические клиники, зуботехнические лаборатории.




SAME AS ORIGINAL



10. Способ применения медицинского изделия

Техника фрезерования

Материалы стоматологические реставрационные Amber Mill для изготовления стоматологических стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, с использованием систем CAD/CAM.

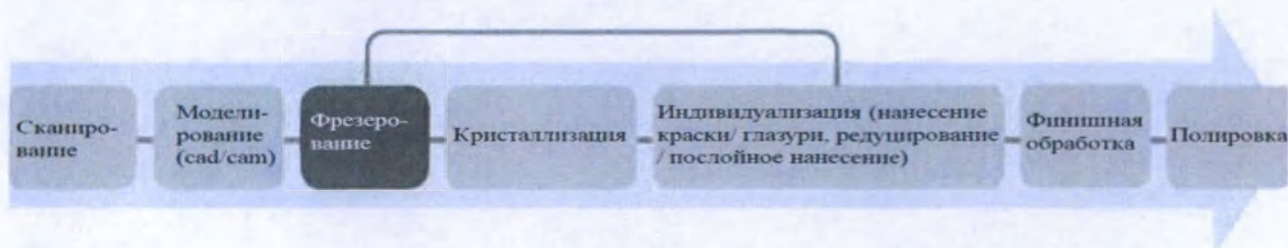

1. Установите держатель в точное положение.
2. Закрепите его на оборудовании CAD/CAM.
3. Введите информацию о размере подготовленного блока в оборудование CAD/CAM.
4. Введите корректирующую информацию, необходимую для обработки.
5. Обработайте блок на CAD/CAM оборудовании.
6. Осторожно достаньте блок из оборудования после завершения обработки.
7. Отсоедините от блока обработанную реставрацию.
8. Полученную реставрацию подвергните тепловой обработке при температуре 830~850°C для кристаллизации.
9. При необходимости покройте красками и глазурью.

- Хранение и обращение с изделием после использования.
- Не хранить в открытой упаковке или грязном месте, это может привести к загрязнению продукта.
- Хранить вдали от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Не использовать повторно и не перерабатывать оставшуюся часть продукта после использования

Физико-механические свойства

Материал: Стеклокерамика

Прочность на изгиб: более 300 МПа

Химическая растворимость: ниже 100 мг/см²


Коэффициент термического расширения: 10.0(±0.5) x 10⁻⁶ K⁻¹

Изделие для одноразового использования

Не использовать повторно

SAME AS ORIGINAL

Материалы стоматологические реставрационные Amber Mill Meso предназначены для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, индивидуальные абатменты, с использованием систем CAD/CAM.

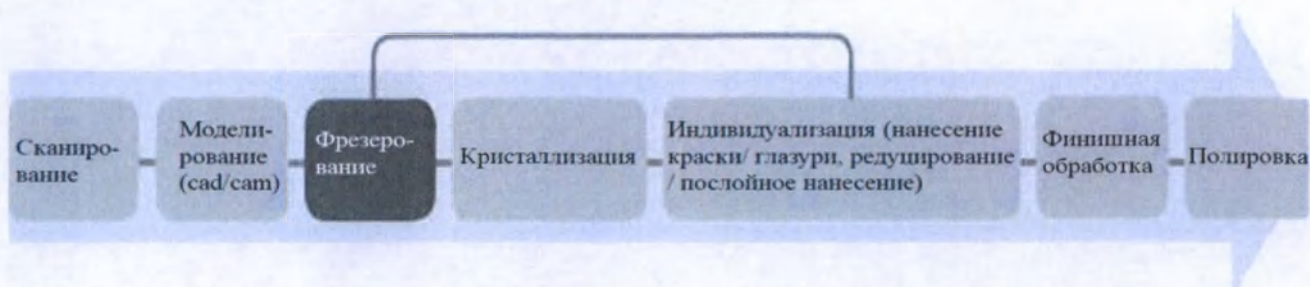

1. Установите держатель в точное положение.
2. Закрепите его на оборудовании CAD/CAM.
3. Введите информацию о размере подготовленного блока в оборудование CAD/CAM.
4. Введите корректирующую информацию, необходимую для обработки.
5. Обработайте блок на CAD/CAM оборудовании.
6. Осторожно достаньте блок из оборудования после завершения обработки.
7. Отсоедините от блока обработанную реставрацию.
8. Полученную реставрацию подвергните тепловой обработке при температуре 830~850°C для кристаллизации.
9. При необходимости покройте красками и глазурью.

- Хранение и обращение с изделием после использования.
- Не хранить в открытой упаковке или грязном месте, это может привести к загрязнению продукта.
- Хранить вдали от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Не использовать повторно и не перерабатывать оставшуюся часть продукта после использования

Физико-механические свойства

Материал: Стеклокерамика

Прочность на изгиб: более 300 МПа

Химическая растворимость: ниже 100мг/см²

Коэффициент термического расширения: 10.0(±0.5) x10⁻⁶K⁻¹

Изделие для одноразового использования

Не использовать повторно

SAME AS ORIGINAL

Материалы стоматологические реставрационные Amber Mill Q предназначены для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, индивидуальные абатменты, с использованием систем CAD/CAM.



Инструкция по применению.

Данное изделие должно использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной CAD/CAM системы.

1. Установите держатель в точное положение.
2. Закрепите его на оборудовании CAD/CAM.
3. Введите информацию о размере подготовленного блока в оборудование CAD/CAM.
4. Введите корректирующую информацию, необходимую для обработки.
5. Обработайте блок на CAD/CAM оборудовании.
6. Осторожно достаньте блок из оборудования после завершения обработки.
7. Отсоедините от блока изготовленный зуб или иную реставрацию.
8. При необходимости покройте красками и глазурью.

Хранение и обращение с изделием после использования.

- не хранить в открытой упаковке или грязном месте, это может привести к загрязнению продукта.
- хранить вдали от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур.
- не использовать повторно и не перерабатывать оставшуюся часть продукта после использования

Физико-механические свойства

Материал: Стеклокерамика

Прочность на изгиб: более 300 МПа

Химическая растворимость: ниже 100 мг/см²


Коэффициент термического расширения: 10.0(±0.5) x 10⁻⁶ K⁻¹

Изделие для одноразового использования

Не использовать повторно

SAME AS ORIGINAL

Материалы стоматологические реставрационные Amber Mill Direct предназначены для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, с использованием систем CAD/CAM.

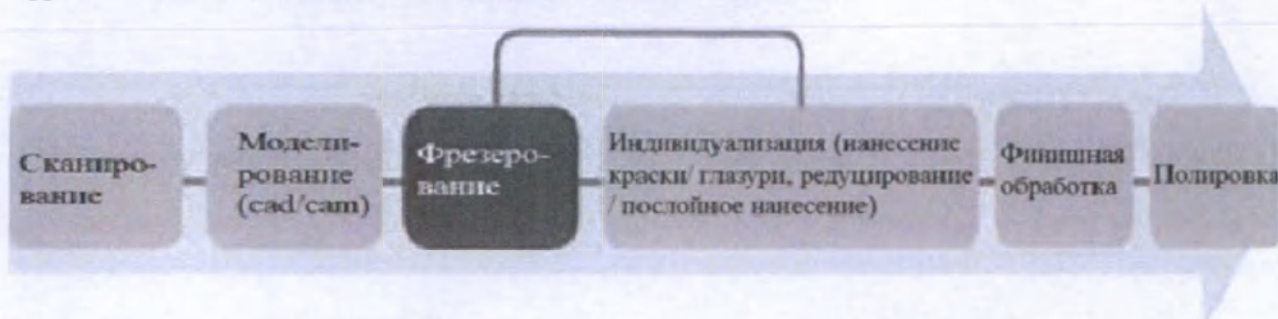

Инструкция по применению.

Данное изделие должно использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной CAD/CAM системы.

1. Установите держатель в точное положение.
2. Закрепите его на оборудовании CAD/CAM.
3. Введите информацию о размере подготовленного блока в оборудование CAD/CAM.
4. Введите корректирующую информацию, необходимую для обработки.
5. Обработайте блок на CAD/CAM оборудовании.
6. Осторожно достаньте блок из оборудования после завершения обработки.
7. Отсоедините от блока изготовленную реставрацию.
8. При необходимости покройте красками и глазурью.

Хранение и обращение с изделием после использования.

- не хранить в открытой упаковке или грязном месте, это может привести к загрязнению продукта.
- хранить вдали от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур.
- не использовать повторно и не перерабатывать оставшуюся часть продукта после использования

Физико-механические свойства

Материал: Стеклокерамика

Прочность на изгиб: более 300 МПа

Химическая растворимость: ниже 100 мг/см²

Коэффициент термического расширения: 10.0(±0.5) x 10⁻⁶ K⁻¹

Изделие для одноразового использования

Не использовать повторно

SAME AS ORIGINAL

Техника прессования

Материалы стоматологические реставрационные Amber Press/ Amber Press Master для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, с использованием техники прессования.

Создание восковой модели	Установка литников	Паковка*	Прессование**	Распаковка	Пескоструйная обработка***
--------------------------	--------------------	----------	---------------	------------	----------------------------

*

Блок	Воск+литник	Силиконовое кольцо	**См. описание этапов процесса прессования
R20 1 шт	До 0,7 г	100 г	***Не использовать шарики из оксида алюминия для пескоструйной обработки, только стеклянные шарики
R10 1 шт	До 1.7 г	200 г	

Описание этапов процесса прессования

1. Создание восковой модели

- Подготовьте модель
- Нанесите изоляционный лак в два слоя, не доходя 1 мм до уступа
- Восковая модель для окрашивания.
- Моделировка модели с учетом окклюзии.

2. Установка литников.

- Установите литники, обеспечивая плавный проход керамики
- Установите литники в самую толстую часть восковой модели.
- Для мостовидных конструкций используйте силиконовое кольцо на 200 г
- Не устанавливайте литники в области понтиков.
- Максимальная высота модели, включая литники, не должна превышать 15-16 мм.
- Литники должны устанавливаться под углом 45 ~ 60°.
- Жевательная поверхность восковой заготовки должна быть повернута внутрь опоки.
- При прессовании 1 единицы в модели на противоположную сторону устанавливается «пустой» литник.

3. Паковка

- Взвесьте восковую модель, затем определите размер блока и силиконового кольца.

	Маленький блок	Большой блок
Вес восковой модели	Макс. до 0,75 г	макс. до 2 г
Силиконовое кольцо	100 или 200 г	только 200 г

SAME ORIGINAL

- Используйте вакуумный смеситель для замешивания паковочной массы, соблюдая соотношение порошка и жидкости.
- Осторожно заполните силиконовое кольцо паковочной массой до указанной отметки и установите верхнюю крышку поворотными движениями. Затем оставьте опоку на 40 мин. в устойчивом ровном месте (без вибрации).
- Предварительно нагрейте муфельную печь до температуры 850С.
- Снимите крышку и вытащите опоку из силиконового кольца. Затем поместите опоку в печь, нагретую до температуры 850С, на 40-60 минут.
- Будьте внимательны, так как несоблюдение температурного режима приведет к некорректным результатам процесса прессования.

4. Прессование

- Поместите выбранный блок в опоку и установите очищенный плунжер. Затем запустите программу.
- Выбирайте подходящую программу в зависимости от модели печи.

5. Охлаждение

- После завершения прессования медленно охладите опоку, в течение примерно 1 часа.

6. Распаковка

- Отметьте длину плунжера на охлажденной опоке.
- При помощи разделительного диска отделите часть опоки с плунжером, и извлеките отпрессованные объекты.

Хранение и обращение с изделием после использования

- Не хранить в открытой упаковке или грязном месте, это может привести к загрязнению продукта.
- Хранить вдали от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Не использовать повторно и не перерабатывать оставшуюся часть продукта после использования.

Физико-механические свойства

Материал: Стеклокерамика

Прочность на изгиб: более 300 МПа

Химическая растворимость: ниже 100мг/см²

Коэффициент термического расширения: 10.0(±0.5) x 10⁻⁶К⁻¹

Изделие для однократного использования

Не использовать повторно


SAME AS ORIGINAL

Материалы стоматологические реставрационные Amber LiSi-POZ для изготовления стоматологических стеклокерамических реставраций, таких как единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки/накладки, мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, с использованием техники прессования.

Инструкция по применению.

Создание восковой модели	Установка литников	Паковка*	Прессование**	Распаковка	Пескоструйная обработка***
--------------------------	--------------------	----------	---------------	------------	----------------------------

*

Блок	Воск+литник	Силиконовое кольцо	**См. описание этапов процесса прессования
R10 1 шт	До 0,7 г	100 г	***Не использовать шарики из оксида алюминия для пескоструйной обработки, только стеклянные
R20 1 шт	До 1,7 г	200 г	

Описание этапов процесса прессования

1. Обжиг каркаса из диоксида циркония ZrO₂

- Осуществите обжиг для стабилизации фазы в течение 15 минут при температуре 1050°C.
- Продолжите обжиг с усилителем адгезии в течение 5 минут при температуре 950°C
- Толщина покрытия должна быть в пределах 0,1 мм.
- Охлаждение до комнатной температуры должно проходить в течение длительного времени.

2. Восковое моделирование

- Подготовьте модель.
- Нанесите изоляционный лак в два слоя, не доходя 1 мм до уступа
- Восковая модель для окрашивания
- Моделировка модели с учетом окклюзии.

3. Установка литников

- Установите литники, обеспечивая плавный проход керамики
- Установите литники в самую толстую часть восковой модели
- Для мостовидных конструкций используйте кольцо для опоки на 200 г.
- Не устанавливайте литники в область понтиков.
- Максимальная высота модели, включая литники, не должна превышать 15-16 мм.
- Устанавливайте литники под углом 45-60°
- Жевательная поверхность восковой заготовки должна быть повернута внутрь опоки.
- При прессовании 1 единицы в модели на противоположную сторону устанавливается «пустой» литник.

4. Паковка

- Взвесьте восковую модель, затем определите размер блока и опоки.

SAME AS ORIGINAL

	Матерный блок	Большой блок
Вес восковой модели	Макс. до 0,75 г	макс. до 2 г
Силиконовое кольцо	100 или 200 г	только 200 г

- Используйте вакуумный смеситель для замешивания паковочной массы, соблюдая соотношение порошка и жидкости.
- Осторожно заполните силиконовое кольцо паковочной массой до указанной отметки и установите верхнюю крышку поворотными движениями. Затем оставьте опоку на 40 мин. в устойчивом ровном месте (без вибрации).
- Предварительно нагрейте муфельную печь до температуры 850°C
- Снимите крышку и вытащите опоку из силиконового кольца. Затем поместите опоку в печь, нагретую до температуры до 850C, на 40-60 минут.
- Будьте внимательны, так как несоблюдение температурного режима приведет к некорректным результатам процесса прессования.

5. Прессование

- Поместите выбранный блок в опоку и установите очищенный плунжер. Затем запустите программу.
- Выбирайте подходящую программу в зависимости от модели печи.

6. Охлаждение

- После завершения прессования медленно охладите опоку, в течение примерно 1 часа.

7. Распаковка

- Сделайте отметку длины плунжера на охлажденной опоке
- При помощи разделительного диска отделите часть опоки с плунжером, и извлеките отпрессованные объекты.

Хранение и обращение с изделием после использования

- Не хранить в открытой упаковке или грязном месте, это может привести к загрязнению продукта
- Хранить вдали от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур
- Не использовать повторно и не перерабатывать оставшуюся часть продукта после использования

SAME AS ORIGINAL

Физико-механические свойства

Материал: Стеклокерамика

Прочность на изгиб: более 300 МПа

Химическая растворимость: ниже 100 мг/см²

Коэффициент термического расширения: $10.0(\pm 0.5) \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$

Изделие для одноразового использования

Не использовать повторно




SAME AS ORIGINAL

11. Размеры и графическое изображение изделия




Для техники фрезерования

Amber Mill, Amber Mill Meso

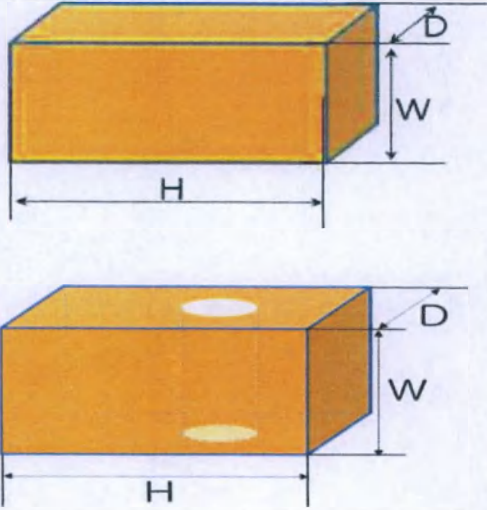No	Наименование модели	Размеры (д*ш*в, мм)	Вес, (г)	Графическое изображение
1	Amber Mil 1 C5	$(5 \times 12 \times 15) \pm 2$	$2.60 \pm 5\%$	
2	Amber Mill C8	$(8 \times 8 \times 15) \pm 2$	$2.80 \pm 5\%$	
3	Amber Mill C10	$(8 \times 10 \times 15) \pm 2$	$3.60 \pm 5\%$	
4	Amber Mill C12	$(10 \times 12 \times 15) \pm 2$	$5.90 \pm 5\%$	
5	Amber Mill C14 Amber Mill Meso C14	$(12 \times 14 \times 18) \pm 2$	$9.10 \pm 5\%$	
6	Amber Mill C16 Amber Mill Meso C16	$(17.5 \times 16 \times 18) \pm 2$	$10.30 \pm 5\%$	
7	Amber Mill C32	$(14.5 \times 14.5 \times 32) \pm 2$	$18.7 \pm 5\%$	
8	Amber Mill C40	$(15.2 \times 15.2 \times 38) \pm 2$	$24.2 \pm 5\%$	

SAMPLE AS ORIGINAL


SAME
 AS
 ORIGINAL

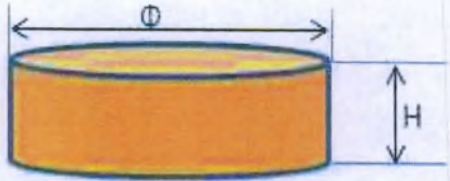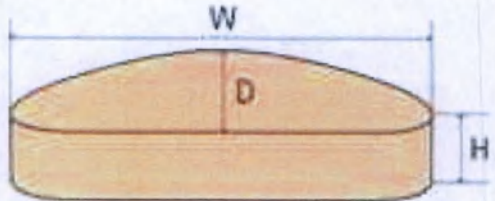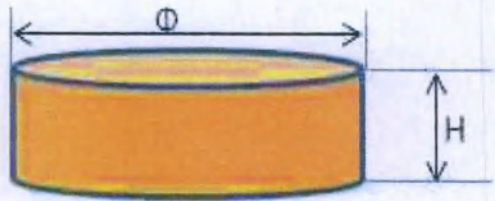9	Amber Mill P98	$(\varnothing 98 \times 6) \pm 2$	$176 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 98 \times 8) \pm 2$	$179 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 98 \times 10) \pm 2$	$183 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 98 \times 12) \pm 2$	$222 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 98 \times 14) \pm 2$	$275 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 98 \times 16) \pm 2$	$325 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 98 \times 18) \pm 2$	$428 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 98 \times 20) \pm 2$	$476 \pm 5\%$	
10	Amber Mill A71	$(72.2 \times 89.2 \times 6.1) \pm 2$	$229 \pm 5\%$	
		$(72.2 \times 89.2 \times 8.1) \pm 2$	$233 \pm 5\%$	
		$(72.2 \times 89.2 \times 10.1) \pm 2$	$238 \pm 5\%$	
		$(72.2 \times 89.2 \times 12.1) \pm 2$	$288 \pm 5\%$	
		$(72.2 \times 89.2 \times 14.1) \pm 2$	$335 \pm 5\%$	
		$(72.2 \times 89.2 \times 16.1) \pm 2$	$380 \pm 5\%$	
		$(72.2 \times 89.2 \times 18.1) \pm 2$	$428 \pm 5\%$	
		$(72.2 \times 89.2 \times 20.1) \pm 2$	$476 \pm 5\%$	
11	Amber Mill Z95	$(\varnothing 95 \times 6) \pm 2$	$173 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 95 \times 8) \pm 2$	$176 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 95 \times 10) \pm 2$	$180 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 95 \times 12) \pm 2$	$211 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 95 \times 14) \pm 2$	$242 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 95 \times 16) \pm 2$	$273 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 95 \times 18) \pm 2$	$304 \pm 5\%$	
		$(\varnothing 95 \times 20) \pm 2$	$335 \pm 5\%$	


Amber Mill Q (W_b - наружный диаметр циркониевой вставки, I_b - внутренний диаметр циркониевой вставки, H_b – длина циркониевой вставки, W_c – диаметр отверстия в блоке)

	Наименование модели	Размеры, (мм)			Вес, (г)	Графическое изображение
		Блок, (д×ш×в), мм	Вставка, ($W_b \times I_b \times H_b$)	Диаметр отверстия в блоке (W_c),		
1	Amber Mill Q C12/ TB5.4L	(10×12×15)±2	($\varnothing 4.9 \times \varnothing 3.5 \times 5.8$)±0.5	$\varnothing 2.4 \pm 0.5$	5.47±5%	
2	Amber Mill Q C12/ TB4.1L		($\varnothing 3.9 \times \varnothing 3.5 \times 4.9$)±0.5		5.40±5%	
3	Amber Mill Q C12/ TB3.0S		($\varnothing 3.8 \times \varnothing 3.0 \times 3.9$) ±0.5		5.39±5%	
4	Amber Mill Q C12/ TB3.5L		($\varnothing 3.9 \times \varnothing 3.5 \times 3.9$)±0.5		5.41±5%	
5	Amber Mill Q C12/ TB4.8L		($\varnothing 4.3 \times \varnothing 3.5 \times 4.8$)±0.5		5.43±5%	
6	Amber Mill Q C14/ TB5.4L	(12×14× 18)±2	($\varnothing 4.9 \times \varnothing 3.5 \times 5.8$)±0.5	$\varnothing 2.4 \pm 0.5$	9.03±5%	
7	Amber Mill Q C14/ TB4.1L		($\varnothing 3.9 \times \varnothing 3.5 \times 4.9$)±0.5		8.95±5%	
8	Amber Mill Q C14/ TB3.0S		($\varnothing 3.8 \times \varnothing 3.0 \times 3.9$)±0.5		8.90±5%	
9	Amber Mill Q C14/ TB3.5L		($\varnothing 3.9 \times \varnothing 3.5 \times 3.9$)±0.5		8.92±5%	
10	Amber Mill Q C14/ TB4.8L		($\varnothing 4.3 \times \varnothing 3.5 \times 4.8$)±0.5		9.00±5%	
11	Amber Mill Q C16/ TB5.4L	(17.5×16×18)±2	($\varnothing 4.9 \times \varnothing 3.5 \times 5.8$)±0.5	$\varnothing 2.4 \pm 0.5$	10.10±5%	
12	Amber Mill Q C16/ TB4.1L		($\varnothing 3.9 \times \varnothing 3.5 \times 4.9$)±0.5		9.45±5%	
13	Amber Mill Q C16/ TB3.0S		($\varnothing 3.8 \times \varnothing 3.0 \times 3.9$)±0.5		9.40±5%	
14	Amber Mill Q C16/ TB3.5L		($\varnothing 3.9 \times \varnothing 3.5 \times 3.9$)±0.5		9.43±5%	
15	Amber Mill Q C16/ TB4.8L		($\varnothing 4.3 \times \varnothing 3.5 \times 4.8$)±0.5		10.01±5%	

SAMPLE AS ORIGINAL

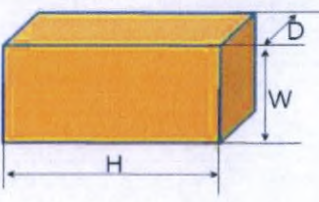No	Наименование модели	Размеры (ш×д×в), мм W*D*H	Вес, (г)	Графическое изображение
1	Amber Mill Direct C12	(10×12×15) ±2	5.90±5%	
2	Amber Mill Direct C14	(12×14×18) ±2	9.40±5%	
3	Amber Mill Direct C16	(17.5×16×18) ±2	10.30±5%	

Для техники прессования

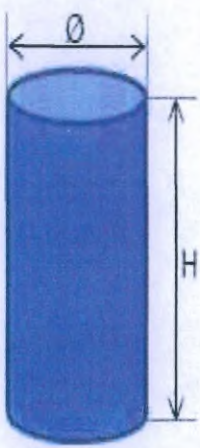No	Наименование модели	Размеры (ш×д×в), мм	Вес, (г)	Графическое изображение
1	Amber Press R7 Amber LiSi-POZ R7	Ø12.6×7,1±0.3	2±5%	
2	Amber Press R10 Amber LiSi-POZ R10 Amber Press Master R10	Ø12.6×10,1±0.3	3.08±5%	
3	Amber Press R15 Amber LiSi-POZ R15	Ø12.6×15,1±0.3	4.5±5%	
4	Amber Press R20 Amber LiSi-POZ R20 Amber Press Master R20	Ø12.6×20,2±0.3	5.99±5%	



SAME AS ORIGINAL

**12. Физические и механические свойства материалов стоматологических
реставрационных Amber**

№.	Параметр	Ед.изм.	Значение
1	Химическая растворимость	мг/см ²	28
2	Предельная прочность на изгиб	МПа	455
3	Радиоактивность стоматологической керамики	Bq/g (Бк/г)	6.59×10^{-3}
4	Линейное тепловое расширение	$\times 10^{-6}/K^{-1}$	10.2
5	Температура перехода в стеклообразное состояние	°C	553

Классификационный No. (Класс) KFDA:

для техники фрезерования: C07050.01 (Класс 2)

для техники прессования: C07030.01 (Класс 2)

Запах: без запаха

Физико-механические свойства

Материал: Стеклокерамика

Прочность на изгиб: более 300 МПа

Химическая растворимость: ниже 100 мг/см²

Коэффициент термического расширения: 10.0 (±0.5) x 10⁻⁶ K⁻¹

Изделие для одноразового использования

Не использовать повторно

SAME AS ORIGINAL

13. Перечень и описание материалов медицинского изделия

Материалы в этой технической документации классифицированы как контактирующие с пациентом.

No.	Компонент	Материалы	Контакт с пациентом, длительность																																				
Материалы стоматологические реставрационные Amber																																							
1.	Amber Mill	Стеклокерамика на основе дисиликата лития Состав: <table><tr><th>Сырье</th><th>Количество %</th></tr><tr><td>диоксид кремния (SiO2)</td><td>71.45~78.07</td></tr><tr><td>оксид лития (Li2O)</td><td>11.39~13.50</td></tr><tr><td>оксид калия (K2O)</td><td>0.00 ~ 1.80</td></tr><tr><td>оксид фосфора (P2O5)</td><td>1.51 ~ 3.20</td></tr><tr><td>оксид алюминия (Al2O3)</td><td>1.20 ~ 2.59</td></tr><tr><td>оксид натрий (Na2O)</td><td>0.35 ~ 0.47</td></tr><tr><td>оксид кальция (CaO)</td><td>0.30 ~ 1.89</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид циркония (ZrO2)</td><td>0.50 ~ 2.70</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид церия (CeO2)</td><td>0.00 ~ 1.95</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид железа (Fe2O3)</td><td>0.00 ~ 0.30</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)</td><td>0.00 ~ 0.39</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид марганца (MnO2)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид ванадия (V2O5)</td><td>0.00 ~ 0.23</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)</td><td>0.05 ~ 0.65</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)</td><td>0.00 ~ 0.01</td></tr><tr><td>Итого</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W1, W2, W3, W4	Сырье	Количество %	диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07	оксид лития (Li2O)	11.39~13.50	оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80	оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20	оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59	оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47	оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89	пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70	пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95	пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30	пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39	пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23	пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65	пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01	Итого	100	Контакт в полости рта
Сырье	Количество %																																						
диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07																																						
оксид лития (Li2O)	11.39~13.50																																						
оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80																																						
оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20																																						
оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59																																						
оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47																																						
оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89																																						
пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70																																						
пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95																																						
пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30																																						
пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39																																						
пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23																																						
пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65																																						
пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01																																						
Итого	100																																						
2.	Amber Mill Meso	Стеклокерамика на основе дисиликата лития Состав: <table><tr><th>Сырье</th><th>Количество %</th></tr><tr><td>диоксид кремния (SiO2)</td><td>71.45~78.07</td></tr><tr><td>оксид лития (Li2O)</td><td>11.39~13.50</td></tr><tr><td>оксид калия (K2O)</td><td>0.00 ~ 1.80</td></tr><tr><td>оксид фосфора (P2O5)</td><td>1.51 ~ 3.20</td></tr><tr><td>оксид алюминия (Al2O3)</td><td>1.20 ~ 2.59</td></tr><tr><td>оксид натрий (Na2O)</td><td>0.35 ~ 0.47</td></tr><tr><td>оксид кальция (CaO)</td><td>0.30 ~ 1.89</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид циркония (ZrO2)</td><td>0.50 ~ 2.70</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид церия (CeO2)</td><td>0.00 ~ 1.95</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид железа (Fe2O3)</td><td>0.00 ~ 0.30</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)</td><td>0.00 ~ 0.39</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид марганца (MnO2)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид ванадия (V2O5)</td><td>0.00 ~ 0.23</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)</td><td>0.05 ~ 0.65</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)</td><td>0.00 ~ 0.01</td></tr><tr><td>Итого</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W1, W2, W3, W4	Сырье	Количество %	диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07	оксид лития (Li2O)	11.39~13.50	оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80	оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20	оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59	оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47	оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89	пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70	пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95	пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30	пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39	пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23	пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65	пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01	Итого	100	Контакт в полости рта
Сырье	Количество %																																						
диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07																																						
оксид лития (Li2O)	11.39~13.50																																						
оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80																																						
оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20																																						
оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59																																						
оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47																																						
оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89																																						
пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70																																						
пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95																																						
пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30																																						
пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39																																						
пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23																																						
пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65																																						
пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01																																						
Итого	100																																						

SAME AS ORIGINAL

3.	Amber Mill Q	Стеклокерамика на основе дисиликата лития Состав: <table><tr><th>Сырье</th><th>Количество %</th></tr><tr><td>диоксид кремния (SiO2)</td><td>71.45 ~ 78.07</td></tr><tr><td>оксид лития (Li2O)</td><td>11.39 ~ 13.50</td></tr><tr><td>оксид калия (K2O)</td><td>0.00 ~ 1.80</td></tr><tr><td>оксид фосфора (P2O5)</td><td>1.51 ~ 3.20</td></tr><tr><td>оксид алюминия (Al2O3)</td><td>1.20 ~ 2.59</td></tr><tr><td>оксид натрия (Na2O)</td><td>0.35 ~ 0.47</td></tr><tr><td>оксид кальция (CaO)</td><td>0.30 ~ 1.89</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид циркония (ZrO2)</td><td>0.50 ~ 2.70</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид церия (CeO2)</td><td>0.00 ~ 1.95</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид железа (Fe2O3)</td><td>0.00 ~ 0.30</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)</td><td>0.00 ~ 0.39</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид марганца (MnO2)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид ванадия (V2O5)</td><td>0.00 ~ 0.23</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)</td><td>0.05 ~ 0.65</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)</td><td>0.00 ~ 0.01</td></tr><tr><td>Итого</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W1, W2, W3, W4 MO0, MO1, MO2, MO3, MO4 Прозрачность: LT, HT, MT, MO	Сырье	Количество %	диоксид кремния (SiO2)	71.45 ~ 78.07	оксид лития (Li2O)	11.39 ~ 13.50	оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80	оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20	оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59	оксид натрия (Na2O)	0.35 ~ 0.47	оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89	Пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70	Пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95	Пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30	Пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39	Пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05	Пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23	Пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05	Пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65	Пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01	Итого	100	Контакт в полости рта
Сырье	Количество %																																						
диоксид кремния (SiO2)	71.45 ~ 78.07																																						
оксид лития (Li2O)	11.39 ~ 13.50																																						
оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80																																						
оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20																																						
оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59																																						
оксид натрия (Na2O)	0.35 ~ 0.47																																						
оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89																																						
Пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70																																						
Пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95																																						
Пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30																																						
Пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39																																						
Пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05																																						
Пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23																																						
Пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05																																						
Пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65																																						
Пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01																																						
Итого	100																																						
4.	Amber Mill Direct	Стеклокерамика на основе дисиликата лития Состав: <table><tr><th>Сырье</th><th>Количество %</th></tr><tr><td>диоксид кремния (SiO2)</td><td>71.45 ~ 78.07</td></tr><tr><td>оксид лития (Li2O)</td><td>11.39 ~ 13.50</td></tr><tr><td>оксид калия (K2O)</td><td>0.00 ~ 1.80</td></tr><tr><td>оксид фосфора (P2O5)</td><td>1.51 ~ 3.20</td></tr><tr><td>оксид алюминия (Al2O3)</td><td>1.20 ~ 2.59</td></tr><tr><td>оксид натрия (Na2O)</td><td>0.35 ~ 0.47</td></tr><tr><td>оксид кальция (CaO)</td><td>0.30 ~ 1.89</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид циркония (ZrO2)</td><td>0.50 ~ 2.70</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид церия (CeO2)</td><td>0.00 ~ 1.95</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид железа (Fe2O3)</td><td>0.00 ~ 0.30</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)</td><td>0.00 ~ 0.39</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид марганца (MnO2)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид ванадия (V2O5)</td><td>0.00 ~ 0.23</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)</td><td>0.05 ~ 0.65</td></tr><tr><td>Пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)</td><td>0.00 ~ 0.01</td></tr><tr><td>Итого</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W1, W2, W3, W4 MO0, MO1, MO2, MO3, MO4 Прозрачность: LT, HT, MT, MO	Сырье	Количество %	диоксид кремния (SiO2)	71.45 ~ 78.07	оксид лития (Li2O)	11.39 ~ 13.50	оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80	оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20	оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59	оксид натрия (Na2O)	0.35 ~ 0.47	оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89	Пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70	Пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95	Пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30	Пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39	Пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05	Пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23	Пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05	Пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65	Пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01	Итого	100	Контакт в полости рта
Сырье	Количество %																																						
диоксид кремния (SiO2)	71.45 ~ 78.07																																						
оксид лития (Li2O)	11.39 ~ 13.50																																						
оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80																																						
оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20																																						
оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59																																						
оксид натрия (Na2O)	0.35 ~ 0.47																																						
оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89																																						
Пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70																																						
Пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95																																						
Пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30																																						
Пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39																																						
Пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05																																						
Пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23																																						
Пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05																																						
Пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65																																						
Пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01																																						
Итого	100																																						
5.	Amber Press	Стеклокерамика на основе дисиликата лития Состав: <table><tr><th>Сырье</th><th>Количество %</th></tr><tr><td>диоксид кремния (SiO2)</td><td>71.45 ~ 78.07</td></tr></table>	Сырье	Количество %	диоксид кремния (SiO2)	71.45 ~ 78.07	Контакт в полости рта																																
Сырье	Количество %																																						
диоксид кремния (SiO2)	71.45 ~ 78.07																																						

		<table><tr><td>оксид лития (Li2O)</td><td>11.39~13.50</td></tr><tr><td>оксид калия (K2O)</td><td>0.00 ~ 1.80</td></tr><tr><td>оксид фосфора (P2O5)</td><td>1.51 ~ 3.20</td></tr><tr><td>оксид алюминия (Al2O3)</td><td>1.20 ~ 2.59</td></tr><tr><td>оксид натрий (Na2O)</td><td>0.35 ~ 0.47</td></tr><tr><td>оксид кальция (CaO)</td><td>0.30 ~ 1.89</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид циркония (ZrO2)</td><td>0.50 ~ 2.70</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид церия (CeO2)</td><td>0.00 ~ 1.95</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид железа (Fe2O3)</td><td>0.00 ~ 0.30</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)</td><td>0.00 ~ 0.39</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид марганца (MnO2)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид ванадия (V2O5)</td><td>0.00 ~ 0.23</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)</td><td>0.05 ~ 0.65</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)</td><td>0.00 ~ 0.01</td></tr><tr><td>Итого</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0, W1, W2, W3, W4, MO0, MO1, MO2, MO3, MO4 Прозрачность: LT, HT, MO	оксид лития (Li2O)	11.39~13.50	оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80	оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20	оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59	оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47	оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89	пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70	пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95	пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30	пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39	пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23	пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65	пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01	Итого	100					
оксид лития (Li2O)	11.39~13.50																																						
оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80																																						
оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20																																						
оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59																																						
оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47																																						
оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89																																						
пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70																																						
пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95																																						
пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30																																						
пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39																																						
пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23																																						
пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65																																						
пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01																																						
Итого	100																																						
6.	Amber Press Master	Стеклокерамика на основе дисиликата лития Состав: <table><tr><td>Сырье</td><td>Количество %</td></tr><tr><td>диоксид кремния (SiO2)</td><td>71.45~78.07</td></tr><tr><td>оксид лития (Li2O)</td><td>11.39~13.50</td></tr><tr><td>оксид калия (K2O)</td><td>0.00 ~ 1.80</td></tr><tr><td>оксид фосфора (P2O5)</td><td>1.51 ~ 3.20</td></tr><tr><td>оксид алюминия (Al2O3)</td><td>1.20 ~ 2.59</td></tr><tr><td>оксид натрий (Na2O)</td><td>0.35 ~ 0.47</td></tr><tr><td>оксид кальция (CaO)</td><td>0.30 ~ 1.89</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид циркония (ZrO2)</td><td>0.50 ~ 2.70</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид церия (CeO2)</td><td>0.00 ~ 1.95</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид железа (Fe2O3)</td><td>0.00 ~ 0.30</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)</td><td>0.00 ~ 0.39</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид марганца (MnO2)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид ванадия (V2O5)</td><td>0.00 ~ 0.23</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)</td><td>0.05 ~ 0.65</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)</td><td>0.00 ~ 0.01</td></tr><tr><td>Итого</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: W0.5, A0.5, A1.5, A2.5, A3.5, LO0, LO1, LO2, LO3 Прозрачность: MT, HT+, LO	Сырье	Количество %	диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07	оксид лития (Li2O)	11.39~13.50	оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80	оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20	оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59	оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47	оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89	пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70	пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95	пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30	пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39	пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23	пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65	пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01	Итого	100	Контакт в полости рта
Сырье	Количество %																																						
диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07																																						
оксид лития (Li2O)	11.39~13.50																																						
оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80																																						
оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20																																						
оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59																																						
оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47																																						
оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89																																						
пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70																																						
пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95																																						
пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30																																						
пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39																																						
пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23																																						
пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05																																						
пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65																																						
пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01																																						
Итого	100																																						
7.	Amber LiSi-POZ	Стеклокерамика на основе дисиликата лития Состав: <table><tr><td>Сырье</td><td>Количество %</td></tr><tr><td>диоксид кремния (SiO2)</td><td>71.45~78.07</td></tr><tr><td>оксид лития (Li2O)</td><td>11.39~13.50</td></tr><tr><td>оксид калия (K2O)</td><td>0.00 ~ 1.80</td></tr><tr><td>оксид фосфора (P2O5)</td><td>1.51 ~ 3.20</td></tr><tr><td>оксид алюминия (Al2O3)</td><td>1.20 ~ 2.59</td></tr><tr><td>оксид натрий (Na2O)</td><td>0.35 ~ 0.47</td></tr><tr><td>оксид кальция (CaO)</td><td>0.30 ~ 1.89</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид циркония (ZrO2)</td><td>0.50 ~ 2.70</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид церия (CeO2)</td><td>0.00 ~ 1.95</td></tr></table>	Сырье	Количество %	диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07	оксид лития (Li2O)	11.39~13.50	оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80	оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20	оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59	оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47	оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89	пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70	пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95	Контакт в полости рта																
Сырье	Количество %																																						
диоксид кремния (SiO2)	71.45~78.07																																						
оксид лития (Li2O)	11.39~13.50																																						
оксид калия (K2O)	0.00 ~ 1.80																																						
оксид фосфора (P2O5)	1.51 ~ 3.20																																						
оксид алюминия (Al2O3)	1.20 ~ 2.59																																						
оксид натрий (Na2O)	0.35 ~ 0.47																																						
оксид кальция (CaO)	0.30 ~ 1.89																																						
пигмент – Оксид циркония (ZrO2)	0.50 ~ 2.70																																						
пигмент – Оксид церия (CeO2)	0.00 ~ 1.95																																						

		<table><tr><td>пигмент – Оксид железа (Fe2O3)</td><td>0.00 ~ 0.30</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)</td><td>0.00 ~ 0.39</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид марганца (MnO2)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид ванадия (V2O5)</td><td>0.00 ~ 0.23</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)</td><td>0.00 ~ 0.05</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)</td><td>0.05 ~ 0.65</td></tr><tr><td>пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)</td><td>0.00 ~ 0.01</td></tr><tr><td>Итого</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0, W1, W2, W3, W4, MO0, MO1, MO2, MO3, MO4 Прозрачность: LT, HT, MO	пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30	пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39	пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23	пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05	пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65	пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01	Итого	100	
пигмент – Оксид железа (Fe2O3)	0.00 ~ 0.30																		
пигмент – Оксид гольмия (Ho2O3)	0.00 ~ 0.39																		
пигмент – Оксид марганца (MnO2)	0.00 ~ 0.05																		
пигмент – Оксид ванадия (V2O5)	0.00 ~ 0.23																		
пигмент – Оксид эрбия (Er2O3)	0.00 ~ 0.05																		
пигмент – Оксид тербия (Tb2O3)	0.05 ~ 0.65																		
пигмент – Оксид празеодима (Pr2O3)	0.00 ~ 0.01																		
Итого	100																		
8.	Amber Mill Q (вставка) (для всех моделей линейки Amber Mill Q)	Состав: <table><tr><td>Сырье</td><td>Количество %</td></tr><tr><td>3Y-TZP Диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия</td><td>100</td></tr></table> Производства: «HASS Corporation», Республика Корея Цвет*: здесь цвет неприменим	Сырье	Количество %	3Y-TZP Диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия	100	Контакт в полости рта												
Сырье	Количество %																		
3Y-TZP Диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия	100																		
9.	Держатель (для всех модификаций Amber Mill, Amber Mill Q, Amber Mill Meso, Amber Mill Direct C5, C8, C10, C12, C14, C16, C32, C40)	Алюминиевый сплав Состав: Al (алюминий)– 97.11 – 97.36% Si (кремний) – 0.4-0.8% Fe (железо)- 0.7% Cu (медь) – 0.15-0.4% Mn (марганец) – 0.15% Mg (магний) – 0.8-1.2% Cr (хром) – 0.04-0.35% Zn (цинк) – 0.25% Ti (титан)– 0.15% Производства: «HASS Corporation», Республика Корея	Держатель контактирует с зубным техником (руки)																

* Цвет материала в соответствии со шкалой оттенков ВИТА (VITA)

SAME AS ORIGINAL

14. Упаковка и маркировка медицинского изделия

Внутренняя упаковка [блоки для фрезерования]

Amber Mill

Варианты исполнения:

C5/W1, C5/W2, C5/W3, C5/W4, C5/A1, C5/A2, C5/A3, C5/A3.5, C5/A4, C5/B1, C5/B2, C5/B3, C5/B4, C5/C1, C5/C2, C5/C3, C5/C4, C5/D2, C5/D3, C5/D4


C8/W1, C8/W2, C8/W3, C8/W4, C8/A1, C8/A2, C8/A3, C8/A3.5, C8/A4, C8/B1, C8/B2, C8/B3, C8/B4, C8/C1, C8/C2, C8/C3, C8/C4, C8/D2, C8/D3, C8/D4

C10/W1, C10/W2, C10/W3, C10/W4, C10/A1, C10/A2, C10/A3, C10/A3.5, C10/A4, C10/B1, C10/B2, C10/B3, C10/B4, C10/C1, C10/C2, C10/C3, C10/C4, C10/D2, C10/D3, C10/D4

C12/W1, C12/W2, C12/W3, C12/W4, C12/A1, C12/A2, C12/A3, C12/A3.5, C12/A4, C12/B1, C12/B2, C12/B3, C12/B4, C12/C1, C12/C2, C12/C3, C12/C4, C12/D2, C12/D3, C12/D4

C14/W1, C14/W2, C14/W3, C14/W4, C14/A1, C14/A2, C14/A3, C14/A3.5, C14/A4, C14/B1, C14/B2, C14/B3, C14/B4, C14/C1, C14/C2, C14/C3, C14/C4, C14/D2, C14/D3, C14/D4

C16/W1, C16/W2, C16/W3, C16/W4, C16/A1, C16/A2, C16/A3, C16/A3.5, C16/A4, C16/B1, C16/B2, C16/B3, C16/B4, C16/C1, C16/C2, C16/C3, C16/C4, C16/D2, C16/D3, C16/D4

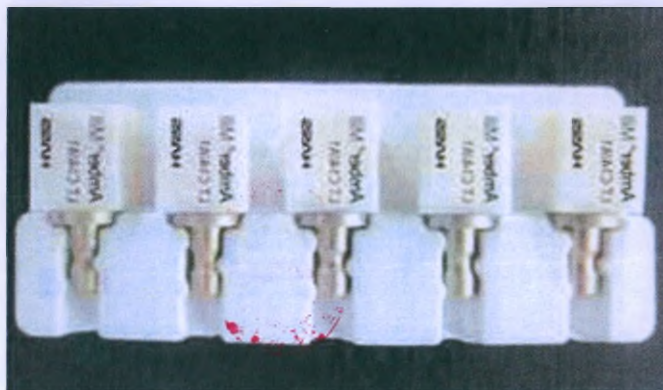

C32/W1, C32/W2, C32/W3, C32/W4, C32/A1, C32/A2, C32/A3, C32/A3.5, C32/A4, C32/B1, C32/B2, C32/B3, C32/B4, C32/C1, C32/C2, C32/C3, C32/C4, C32/D2, C32/D3, C32/D4

C40/W1, C40/W2, C40/W3, C40/W4, C40/A1, C40/A2, C40/A3, C40/A3.5, C40/A4, C40/B1, C40/B2, C40/B3, C40/B4, C40/C1, C40/C2, C40/C3, C40/C4, C40/D2, C40/D3, C40/D4



Материал упаковки: PS (Полистирол)

Размер: 110(ш)×50(д)×15(в) (Ед. изм: мм)

SAME AS ORIGINAL

Amber Mill

Варианты исполнения:

P9806/W1, P9806/W2, P9806/W3, P9806/W4, P9806/A1, P9806/A2, P9806/A3, P9806/A3.5, P9806/A4, P9806/B1, P9806/B2, P9806/B3, P9806/B4, P9806/C1, P9806/C2, P9806/C3, P9806/C4, P9806/D2, P9806/D3, P9806/D4, P9808/W1, P9808/W2, P9808/W3, P9808/W4, P9808/A1, P9808/A2, P9808/A3, P9808/A3.5, P9808/A4, P9808/B1, P9808/B2, P9808/B3, P9808/B4, P9808/C1, P9808/C2, P9808/C3, P9808/C4, P9808/D2, P9808/D3, P9808/D4, P9810/W1, P9810/W2, P9810/W3, P9810/W4, P9810/A1, P9810/A2, P9810/A3, P9810/A3.5, P9810/A4, P9810/B1, P9810/B2, P9810/B3, P9810/B4, P9810/C1, P9810/C2, P9810/C3, P9810/C4, P9810/D2, P9810/D3, P9810/D4, P9812/W1, P9812/W2, P9812/W3, P9812/W4, P9812/A1, P9812/A2, P9812/A3, P9812/A3.5, P9812/A4, P9812/B1, P9812/B2, P9812/B3, P9812/B4, P9812/C1, P9812/C2, P9812/C3, P9812/C4, P9812/D2, P9812/D3, P9812/D4, P9814/W1, P9814/W2, P9814/W3, P9814/W4, P9814/A1, P9814/A2, P9814/A3, P9814/A3.5, P9814/A4, P9814/B1, P9814/B2, P9814/B3, P9814/B4, P9814/C1, P9814/C2, P9814/C3, P9814/C4, P9814/D2, P9814/D3, P9814/D4, P9816/W1, P9816/W2, P9816/W3, P9816/W4, P9816/A1, P9816/A2, P9816/A3, P9816/A3.5, P9816/A4, P9816/B1, P9816/B2, P9816/B3, P9816/B4, P9816/C1, P9816/C2, P9816/C3, P9816/C4, P9816/D2, P9816/D3, P9816/D4, P9818/W1, P9818/W2, P9818/W3, P9818/W4, P9818/A1, P9818/A2, P9818/A3, P9818/A3.5, P9818/A4, P9818/B1, P9818/B2, P9818/B3, P9818/B4, P9818/C1, P9818/C2, P9818/C3, P9818/C4, P9818/D2, P9818/D3, P9818/D4, P9820/W1, P9820/W2, P9820/W3, P9820/W4, P9820/A1, P9820/A2, P9820/A3, P9820/A3.5, P9820/A4, P9820/B1, P9820/B2, P9820/B3, P9820/B4, P9820/C1, P9820/C2, P9820/C3, P9820/C4, P9820/D2, P9820/D3, P9820/D4, A7106/W1, A7106/W2, A7106/W3, A7106/W4, A7106/A1, A7106/A2, A7106/A3, A7106/A3.5, A7106/A4, A7106/B1, A7106/B2, A7106/B3, A7106/B4, A7106/C1, A7106/C2, A7106/C3, A7106/C4, A7106/D2, A7106/D3, A7106/D4, A7108/W1, A7108/W2, A7108/W3, A7108/W4, A7108/A1, A7108/A2, A7108/A3, A7108/A3.5, A7108/A4, A7108/B1, A7108/B2, A7108/B3, A7108/B4, A7108/C1, A7108/C2, A7108/C3, A7108/C4, A7108/D2, A7108/D3, A7108/D4, A7110/W1, A7110/W2, A7110/W3, A7110/W4, A7110/A1, A7110/A2, A7110/A3, A7110/A3.5, A7110/A4, A7110/B1, A7110/B2, A7110/B3, A7110/B4, A7110/C1, A7110/C2, A7110/C3, A7110/C4, A7110/D2, A7110/D3, A7110/D4, A7112/W1, A7112/W2, A7112/W3, A7112/W4, A7112/A1, A7112/A2, A7112/A3, A7112/A3.5, A7112/A4, A7112/B1, A7112/B2, A7112/B3, A7112/B4, A7112/C1, A7112/C2, A7112/C3, A7112/C4, A7112/D2, A7112/D3, A7112/D4, A7114/W1, A7114/W2, A7114/W3, A7114/W4, A7114/A1, A7114/A2, A7114/A3, A7114/A3.5, A7114/A4, A7114/B1, A7114/B2, A7114/B3, A7114/B4, A7114/C1, A7114/C2, A7114/C3, A7114/C4, A7114/D2, A7114/D3, A7114/D4, A7116/W1, A7116/W2, A7116/W3, A7116/W4, A7116/A1, A7116/A2, A7116/A3, A7116/A3.5, A7116/A4, A7116/B1, A7116/B2, A7116/B3, A7116/B4, A7116/C1, A7116/C2, A7116/C3, A7116/C4, A7116/D2, A7116/D3, A7116/D4, A7118/W1, A7118/W2, A7118/W3, A7118/W4, A7118/A1, A7118/A2, A7118/A3, A7118/A3.5, A7118/A4, A7118/B1, A7118/B2, A7118/B3, A7118/B4, A7118/C1, A7118/C2, A7118/C3, A7118/C4, A7118/D2, A7118/D3, A7118/D4, A7120/W1, A7120/W2, A7120/W3, A7120/W4, A7120/A1, A7120/A2, A7120/A3, A7120/A3.5, A7120/A4, A7120/B1, A7120/B2, A7120/B3, A7120/B4, A7120/C1, A7120/C2, A7120/C3, A7120/C4, A7120/D2, A7120/D3, A7120/D4, Z9506/W1, Z9506/W2, Z9506/W3, Z9506/W4, Z9506/A1, Z9506/A2, Z9506/A3, Z9506/A3.5, Z9506/A4, Z9506/B1, Z9506/B2, Z9506/B3, Z9506/B4, Z9506/C1, Z9506/C2, Z9506/C3, Z9506/C4, Z9506/D2, Z9506/D3, Z9506/D4, Z9508/W1, Z9508/W2, Z9508/W3, Z9508/W4, Z9508/A1, Z9508/A2, Z9508/A3, Z9508/A3.5, Z9508/A4, Z9508/B1, Z9508/B2, Z9508/B3, Z9508/B4, Z9508/C1, Z9508/C2, Z9508/C3, Z9508/C4, Z9508/D2, Z9508/D3, Z9508/D4, Z9510/W1, Z9510/W2, Z9510/W3, Z9510/W4, Z9510/A1, Z9510/A2, Z9510/A3, Z9510/A3.5, Z9510/A4, Z9510/B1, Z9510/B2, Z9510/B3, Z9510/B4, Z9510/C1, Z9510/C2, Z9510/C3, Z9510/C4, Z9510/D2, Z9510/D3, Z9510/D4, Z9512/W1, Z9512/W2, Z9512/W3, Z9512/W4, Z9512/A1, Z9512/A2, Z9512/A3, Z9512/A3.5, Z9512/A4, Z9512/B1, Z9512/B2, Z9512/B3, Z9512/B4, Z9512/C1, Z9512/C2, Z9512/C3, Z9512/C4, Z9512/D2, Z9512/D3, Z9512/D4, Z9514/W1, Z9514/W2, Z9514/W3, Z9514/W4, Z9514/A1, Z9514/A2, Z9514/A3, Z9514/A3.5, Z9514/A4, Z9514/B1, Z9514/B2, Z9514/B3, Z9514/B4, Z9514/C1, Z9514/C2, Z9514/C3, Z9514/C4, Z9514/D2, Z9514/D3, Z9514/D4, Z9516/W1, Z9516/W2, Z9516/W3, Z9516/W4, Z9516/A1, Z9516/A2, Z9516/A3, Z9516/A3.5, Z9516/A4, Z9516/B1, Z9516/B2, Z9516/B3, Z9516/B4, Z9516/C1, Z9516/C2, Z9516/C3, Z9516/C4, Z9516/D2, Z9516/D3, Z9516/D4, Z9518/W1, Z9518/W2, Z9518/W3, Z9518/W4, Z9518/A1, Z9518/A2, Z9518/A3, Z9518/A3.5, Z9518/A4, Z9518/B1, Z9518/B2, Z9518/B3, Z9518/B4, Z9518/C1, Z9518/C2, Z9518/C3, Z9518/C4, Z9518/D2, Z9518/D3, Z9518/D4, Z9520/W1, Z9520/W2, Z9520/W3, Z9520/W4, Z9520/A1, Z9520/A2, Z9520/A3, Z9520/A3.5, Z9520/A4, Z9520/B1, Z9520/B2, Z9520/B3, Z9520/B4, Z9520/C1, Z9520/C2, Z9520/C3, Z9520/C4, Z9520/D2, Z9520/D3, Z9520/D4

SAME AS ORIGINAL




Материал упаковки: LPDE Sponge (Полиэтилен низкой плотности)

Размер: 132(ш)×123(д)×30(в) (Ед. изм: мм)

Amber Mill Meso

Варианты исполнения:

C14/W1(S), C14/W2(S), C14/W3(S), C14/W4(S), C14/A1(S), C14/A2(S), C14/A3(S), C14/A3.5(S), C14/A4(S), C14/B1(S), C14/B2(S), C14/B3(S), C14/B4(S), C14/C1(S), C14/C2(S), C14/C3(S), C14/C4(S), C14/D2(S), C14/D3(S), C14/D4(S), C14/W1(L), C14/W2(L), C14/W3(L), C14/W4(L), C14/A1(L), C14/A2(L), C14/A3(L), C14/A3.5(L), C14/A4(L), C14/B1(L), C14/B2(L), C14/B3(L), C14/B4(L), C14/C1(L), C14/C2(L), C14/C3(L), C14/C4(L), C14/D2(L), C14/D3(L), C14/D4(L), C16/W1(S), C16/W2(S), C16/W3(S), C16/W4(S), C16/A1(S), C16/A2(S), C16/A3(S), C16/A3.5(S), C16/A4(S), C16/B1(S), C16/B2(S), C16/B3(S), C16/B4(S), C16/C1(S), C16/C2(S), C16/C3(S), C16/C4(S), C16/D2(S), C16/D3(S), C16/D4(S), C16/W1(L), C16/W2(L), C16/W3(L), C16/W4(L), C16/A1(L), C16/A2(L), C16/A3(L), C16/A3.5(L), C16/A4(L), C16/B1(L), C16/B2(L), C16/B3(L), C16/B4(L), C16/C1(L), C16/C2(L), C16/C3(L), C16/C4(L), C16/D2(L), C16/D3(L), C16/D4(L)

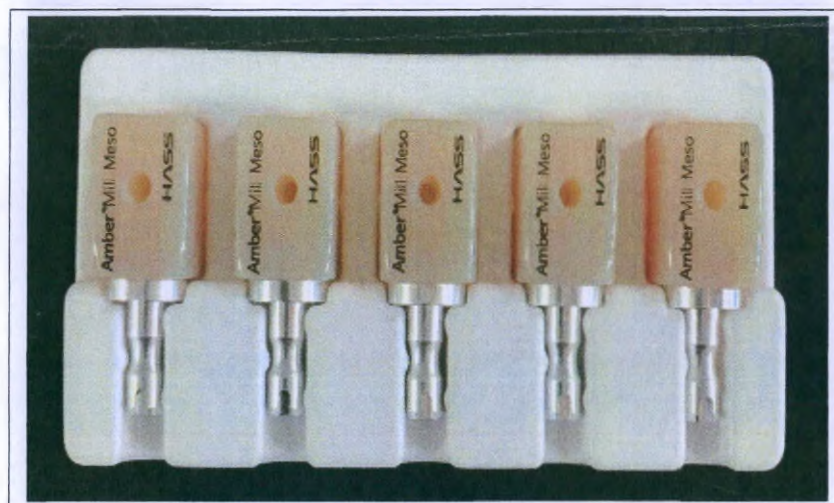

Материал упаковки: PS (Полистирол)

Размер: 110(ш)×50(д)×15(в) (Ед. изм: мм)

SAME AS ORIGINAL

Варианты исполнения:

4.1L, Amber Mill C

ООО ЦРПИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SAME AS ORIGINAL


ber Mill Q LT C12
ber Mill Q LT C1
ber Mill Q LT C1
ber Mill Q LT C1
ber Mill Q LT C1

SAME AS ORIGINAL

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

01

Amber Mill Q MT C16/C3 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/C4 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/D2 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/D3 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/D4 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/0 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/1 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/2 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/3 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/4 TB3.5L, Amber Mill Q LT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/0 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/1 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/2 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/3 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/4 TB4.8L

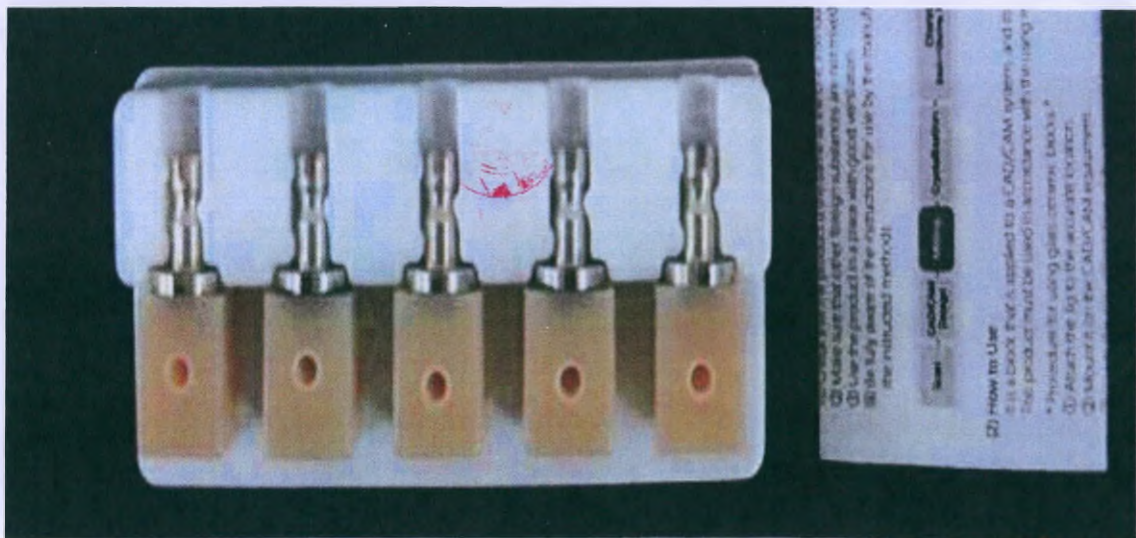

Материал упаковки: PS (Полистирол)


Размер: 110(ш) × 50(д) × 15(в) (Ед.изм: мм)

SAME AS ORIGINAL

Варианты исполнения:

Direct LT C16/A
Direct LT C16/B1, Am

Mill Direct MT C16/C3, Amber Mill Direct MT C16/C4, Amber Mill Direct MT C16/D2, Amber Mill Direct MT C16/D3, Amber Mill Direct MT C16/D4, Amber Mill Direct MO C16/0, Amber Mill Direct MO C16/1, Amber Mill Direct MO C16/2, Amber Mill Direct MO C16/3, Amber Mill Direct MO C16/4

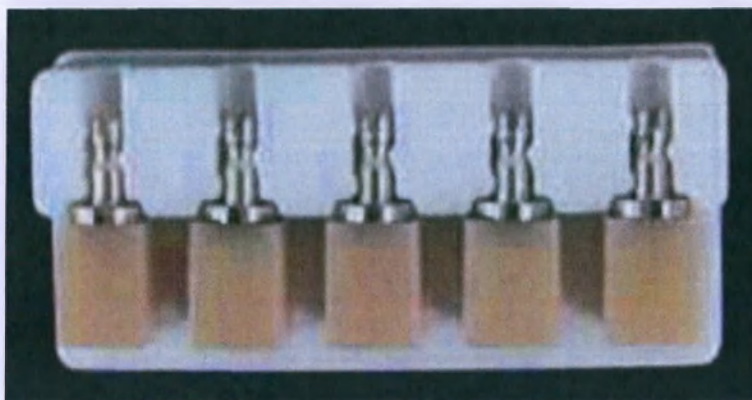

Материал упаковки: PS (Полистирол)

Размер: 110(ш) × 50(д) × 15(в) (Ед.изм: мм)


[блоки для прессования]

Amber Press

Варианты исполнения:

Amber Press LT R7/W1, Amber Press LT R7/W2, Amber Press LT R7/W3, Amber Press LT R7/W4, Amber Press LT R7/A1, Amber Press LT R7/A2, Amber Press LT R7/A3, Amber Press LT R7/A3.5, Amber Press LT R7/A4, Amber Press LT R7/B1, Amber Press LT R7/B2, Amber Press LT R7/B3, Amber Press LT R7/B4, Amber Press LT R7/C1, Amber Press LT R7/C2, Amber Press LT R7/C3, Amber Press LT R7/C4, Amber Press LT R7/D2, Amber Press LT R7/D3, Amber Press LT R7/D4, Amber Press HT R7/W0, Amber Press HT R7/W1, Amber Press HT R7/W2, Amber Press HT R7/W3, Amber Press HT R7/W4, Amber Press HT R7/A1, Amber Press HT R7/A2, Amber Press HT R7/A3, Amber Press HT R7/A3.5, Amber Press HT R7/A4, Amber Press HT R7/B1, Amber Press HT R7/B2, Amber Press HT R7/B3, Amber Press HT R7/B4, Amber Press HT R7/C1, Amber Press HT R7/C2, Amber Press HT R7/C3, Amber Press HT R7/C4, Amber Press HT R7/D2, Amber Press HT R7/D3, Amber Press HT R7/D4, Amber Press MO R7/0, Amber Press MO R7/1, Amber Press MO R7/2, Amber Press MO R7/3, Amber Press MO R7/4, Amber Press LT R10/W1, Amber Press LT R10/W2, Amber Press LT R10/W3, Amber Press LT R10/W4, Amber Press LT R10/A1, Amber Press LT R10/A2, Amber Press LT R10/A3, Amber Press LT R10/A3.5, Amber Press LT R10/A4, Amber Press LT R10/B1, Amber Press LT R10/B2, Amber Press LT R10/B3, Amber Press LT R10/B4, Amber Press LT R10/C1, Amber Press LT R10/C2, Amber Press LT R10/C3, Amber Press LT R10/C4, Amber Press LT R10/D2, Amber Press LT R10/D3, Amber Press LT R10/D4, Amber Press HT R10/W0, Amber Press HT R10/W1, Amber Press HT R10/W2, Amber Press HT R10/W3, Amber Press HT R10/W4, Amber Press HT R10/A1, Amber Press HT R10/A2, Amber Press HT R10/A3, Amber Press HT R10/A3.5, Amber Press HT R10/A4, Amber Press HT R10/B1, Amber Press HT R10/B2, Amber Press HT R10/B3, Amber Press HT R10/B4, Amber Press HT R10/C1, Amber Press HT R10/C2, Amber Press HT R10/C3, Amber Press HT R10/C4, Amber Press HT R10/D2, Amber Press HT R10/D3, Amber Press HT R10/D4, Amber Press MO R10/0, Amber Press MO R10/1, Amber Press MO R10/2, Amber Press MO R10/3, Amber Press MO R10/4,

SAME AS ORIGINAL

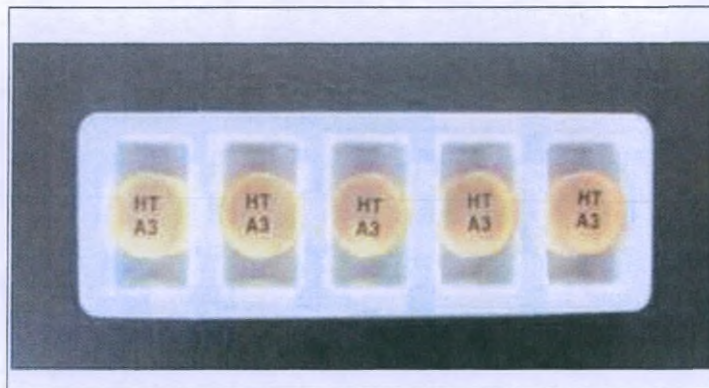

Amber Press LT R15/W1, Amber Press LT R15/W2, Amber Press LT R15/W3, Amber Press LT R15/W4, Amber Press LT R15/A1, Amber Press LT R15/A2, Amber Press LT R15/A3, Amber Press LT R15/A3.5, Amber Press LT R15/A4, Amber Press LT R15/B1, Amber Press LT R15/B2, Amber Press LT R15/B3, Amber Press LT R15/B4, Amber Press LT R15/C1, Amber Press LT R15/C2, Amber Press LT R15/C3, Amber Press LT R15/C4, Amber Press LT R15/D2, Amber Press LT R15/D3, Amber Press LT R15/D4, Amber Press HT R15/W0, Amber Press HT R15/W1, Amber Press HT R15/W2, Amber Press HT R15/W3, Amber Press HT R15/W4, Amber Press HT R15/A1, Amber Press HT R15/A2, Amber Press HT R15/A3, Amber Press HT R15/A3.5, Amber Press HT R15/A4, Amber Press HT R15/B1, Amber Press HT R15/B2, Amber Press HT R15/B3, Amber Press HT R15/B4, Amber Press HT R15/C1, Amber Press HT R15/C2, Amber Press HT R15/C3, Amber Press HT R15/C4, Amber Press HT R15/D2, Amber Press HT R15/D3, Amber Press HT R15/D4, Amber Press MO R15/0, Amber Press MO R15/1, Amber Press MO R15/2, Amber Press MO R15/3, Amber Press MO R15/4, Amber Press LT R20/W1, Amber Press LT R20/W2, Amber Press LT R20/W3, Amber Press LT R20/W4, Amber Press LT R20/A1, Amber Press LT R20/A2, Amber Press LT R20/A3, Amber Press LT R20/A3.5, Amber Press LT R20/A4, Amber Press LT R20/B1, Amber Press LT R20/B2, Amber Press LT R20/B3, Amber Press LT R20/B4, Amber Press LT R20/C1, Amber Press LT R20/C2, Amber Press LT R20/C3, Amber Press LT R20/C4, Amber Press LT R20/D2, Amber Press LT R20/D3, Amber Press LT R20/D4, Amber Press HT R20/W0, Amber Press HT R20/W1, Amber Press HT R20/W2, Amber Press HT R20/W3, Amber Press HT R20/W4, Amber Press HT R20/A1, Amber Press HT R20/A2, Amber Press HT R20/A3, Amber Press HT R20/A3.5, Amber Press HT R20/A4, Amber Press HT R20/B1, Amber Press HT R20/B2, Amber Press HT R20/B3, Amber Press HT R20/B4, Amber Press HT R20/C1, Amber Press HT R20/C2, Amber Press HT R20/C3, Amber Press HT R20/C4, Amber Press HT R20/D2, Amber Press HT R20/D3, Amber Press HT R20/D4, Amber Press MO R20/0, Amber Press MO R20/1, Amber Press MO R20/2, Amber Press MO R20/3, Amber Press MO R20/4



Материал упаковки: PP (Полипропилен)


Размер: 95(ш)×30(д)×10(в) (Ед. изм: мм)

Amber Press Master

Варианты исполнения:

Amber Press Master MT R10/W0.5, Amber Press Master MT R10/A0.5, Amber Press Master MT R10/A1.5, Amber Press Master MT R10/A2.5, Amber Press Master HT+ R10/W0.5, Amber Press Master HT+ R10/A0.5, Amber Press Master HT+ R10/A1.5, Amber Press Master HT+ R10/A2.5, Amber Press Master HT+ R10/A3.5, Amber Press Master LO R10/0, Amber Press Master LO R10/1, Amber Press Master LO R10/2, Amber Press Master LO R10/3,

SAME AS ORIGINAL

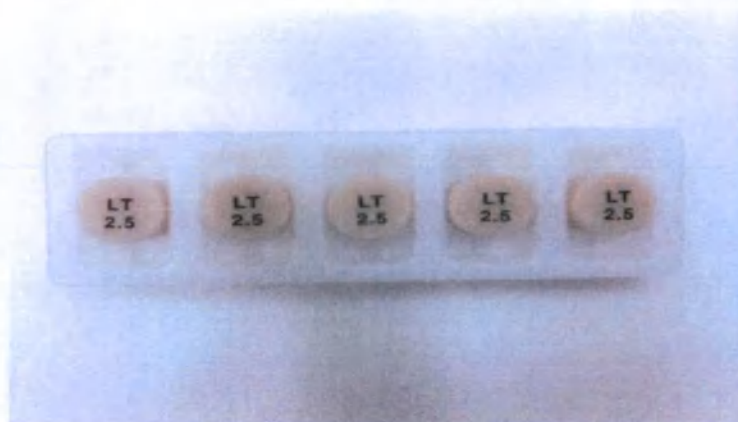

Amber Press Master MT R20/W0.5, Amber Press Master MT R20/A0.5, Amber Press Master MT R20/A1.5, Amber Press Master MT R20/A2.5, Amber Press Master HT+ R20/W0.5, Amber Press Master HT+ R20/A0.5, Amber Press Master HT+ R20/A1.5, Amber Press Master HT+ R20/A2.5, Amber Press Master HT+ R20/A3.5, Amber Press Master LO R20/0, Amber Press Master LO R20/1, Amber Press Master LO R20/2, Amber Press Master LO R20/3



Материал упаковки: PP (Полипропилен)


Размер: 95(ш)×30(д)×10(в) (Ед. изм: мм)

Amber LiSi-POZ

Варианты исполнения:

Amber LiSi-POZ LT R7/W1, Amber LiSi-POZ LT R7/W2, Amber LiSi-POZ LT R7/W3, Amber LiSi-POZ LT R7/W4, Amber LiSi-POZ LT R7/A1, Amber LiSi-POZ LT R7/A2, Amber LiSi-POZ LT R7/A3, Amber LiSi-POZ LT R7/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R7/A4, Amber LiSi-POZ LT R7/B1, Amber LiSi-POZ LT R7/B2, Amber LiSi-POZ LT R7/B3, Amber LiSi-POZ LT R7/B4, Amber LiSi-POZ LT R7/C1, Amber LiSi-POZ LT R7/C2, Amber LiSi-POZ LT R7/C3, Amber LiSi-POZ LT R7/C4, Amber LiSi-POZ LT R7/D2, Amber LiSi-POZ LT R7/D3, Amber LiSi-POZ LT R7/D4, Amber LiSi-POZ HT R7/W0, Amber LiSi-POZ HT R7/W1, Amber LiSi-POZ HT R7/W2, Amber LiSi-POZ HT R7/W3, Amber LiSi-POZ HT R7/W4, Amber LiSi-POZ HT R7/A1, Amber LiSi-POZ HT R7/A2, Amber LiSi-POZ HT R7/A3, Amber LiSi-POZ HT R7/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R7/A4, Amber LiSi-POZ HT R7/B1, Amber LiSi-POZ HT R7/B2, Amber LiSi-POZ HT R7/B3, Amber LiSi-POZ HT R7/B4, Amber LiSi-POZ HT R7/C1, Amber LiSi-POZ HT R7/C2, Amber LiSi-POZ HT R7/C3, Amber LiSi-POZ HT R7/C4, Amber LiSi-POZ HT R7/D2, Amber LiSi-POZ HT R7/D3, Amber LiSi-POZ HT R7/D4, Amber LiSi-POZ MO R7/0, Amber LiSi-POZ MO R7/1, Amber LiSi-POZ MO R7/2, Amber LiSi-POZ MO R7/3, Amber LiSi-POZ MO R7/4, Amber LiSi-POZ LT R10/W1, Amber LiSi-POZ LT R10/W2, Amber LiSi-POZ LT R10/W3, Amber LiSi-POZ LT R10/W4, Amber LiSi-POZ LT R10/A1, Amber LiSi-POZ LT R10/A2, Amber LiSi-POZ LT R10/A3, Amber LiSi-POZ LT R10/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R10/A4, Amber LiSi-POZ LT R10/B1, Amber LiSi-POZ LT R10/B2, Amber LiSi-POZ LT R10/B3, Amber LiSi-POZ LT R10/B4, Amber LiSi-POZ LT R10/C1, Amber LiSi-POZ LT R10/C2, Amber LiSi-POZ LT R10/C3, Amber LiSi-POZ LT R10/C4, Amber LiSi-POZ LT R10/D2, Amber LiSi-POZ LT R10/D3, Amber LiSi-POZ LT R10/D4, Amber LiSi-POZ HT R10/W0, Amber LiSi-POZ HT R10/W1, Amber LiSi-POZ HT R10/W2, Amber LiSi-POZ HT R10/W3, Amber LiSi-POZ HT R10/W4, Amber LiSi-POZ HT R10/A1, Amber LiSi-POZ HT R10/A2, Amber LiSi-POZ HT R10/A3, Amber LiSi-POZ HT R10/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R10/A4, Amber LiSi-POZ HT R10/B1, Amber LiSi-POZ HT R10/B2, Amber LiSi-POZ HT R10/B3, Amber LiSi-POZ HT R10/B4, Amber LiSi-POZ HT R10/C1, Amber LiSi-POZ HT R10/C2, Amber LiSi-POZ HT R10/C3, Amber LiSi-POZ HT R10/C4, Amber LiSi-POZ HT R10/D2, Amber LiSi-POZ HT R10/D3, Amber LiSi-POZ HT R10/D4

R10/D3, Amber LiSi-POZ HT R10/D4, Amber LiSi-POZ MO R10/0, Amber LiSi-POZ MO R10/1, Amber LiSi-POZ MO R10/2, Amber LiSi-POZ MO R10/3, Amber LiSi-POZ MO R10/4,

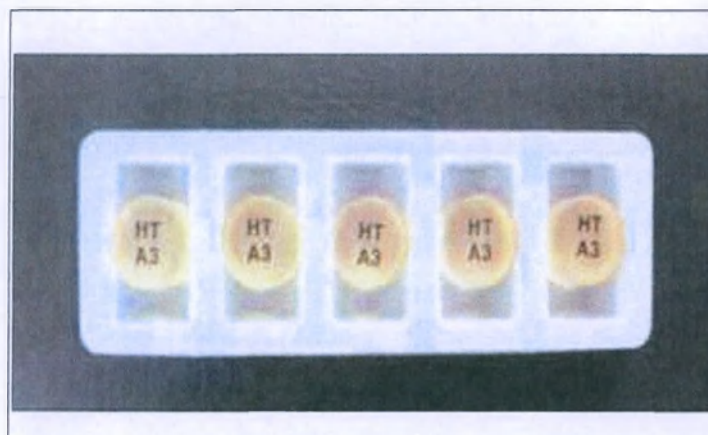

Amber LiSi-POZ LT R15/W1, Amber LiSi-POZ LT R15/W2, Amber LiSi-POZ LT R15/W3, Amber LiSi-POZ LT R15/W4, Amber LiSi-POZ LT R15/A1, Amber LiSi-POZ LT R15/A2, Amber LiSi-POZ LT R15/A3, Amber LiSi-POZ LT R15/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R15/A4, Amber LiSi-POZ LT R15/B1, Amber LiSi-POZ LT R15/B2, Amber LiSi-POZ LT R15/B3, Amber LiSi-POZ LT R15/B4, Amber LiSi-POZ LT R15/C1, Amber LiSi-POZ LT R15/C2, Amber LiSi-POZ LT R15/C3, Amber LiSi-POZ LT R15/C4, Amber LiSi-POZ LT R15/D2, Amber LiSi-POZ LT R15/D3, Amber LiSi-POZ LT R15/D4, Amber LiSi-POZ HT R15/W0, Amber LiSi-POZ HT R15/W1, Amber LiSi-POZ HT R15/W2, Amber LiSi-POZ HT R15/W3, Amber LiSi-POZ HT R15/W4, Amber LiSi-POZ HT R15/A1, Amber LiSi-POZ HT R15/A2, Amber LiSi-POZ HT R15/A3, Amber LiSi-POZ HT R15/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R15/A4, Amber LiSi-POZ HT R15/B1, Amber LiSi-POZ HT R15/B2, Amber LiSi-POZ HT R15/B3, Amber LiSi-POZ HT R15/B4, Amber LiSi-POZ HT R15/C1, Amber LiSi-POZ HT R15/C2, Amber LiSi-POZ HT R15/C3, Amber LiSi-POZ HT R15/C4, Amber LiSi-POZ HT R15/D2, Amber LiSi-POZ HT R15/D3, Amber LiSi-POZ HT R15/D4, Amber LiSi-POZ MO R15/0, Amber LiSi-POZ MO R15/1, Amber LiSi-POZ MO R15/2, Amber LiSi-POZ MO R15/3, Amber LiSi-POZ MO R15/4, Amber LiSi-POZ LT R20/W1, Amber LiSi-POZ LT R20/W2, Amber LiSi-POZ LT R20/W3, Amber LiSi-POZ LT R20/W4, Amber LiSi-POZ LT R20/A1, Amber LiSi-POZ LT R20/A2, Amber LiSi-POZ LT R20/A3, Amber LiSi-POZ LT R20/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R20/A4, Amber LiSi-POZ LT R20/B1, Amber LiSi-POZ LT R20/B2, Amber LiSi-POZ LT R20/B3, Amber LiSi-POZ LT R20/B4, Amber LiSi-POZ LT R20/C1, Amber LiSi-POZ LT R20/C2, Amber LiSi-POZ LT R20/C3, Amber LiSi-POZ LT R20/C4, Amber LiSi-POZ LT R20/D2, Amber LiSi-POZ LT R20/D3, Amber LiSi-POZ LT R20/D4, Amber LiSi-POZ HT R20/W0, Amber LiSi-POZ HT R20/W1, Amber LiSi-POZ HT R20/W2, Amber LiSi-POZ HT R20/W3, Amber LiSi-POZ HT R20/W4, Amber LiSi-POZ HT R20/A1, Amber LiSi-POZ HT R20/A2, Amber LiSi-POZ HT R20/A3, Amber LiSi-POZ HT R20/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R20/A4, Amber LiSi-POZ HT R20/B1, Amber LiSi-POZ HT R20/B2, Amber LiSi-POZ HT R20/B3, Amber LiSi-POZ HT R20/B4, Amber LiSi-POZ HT R20/C1, Amber LiSi-POZ HT R20/C2, Amber LiSi-POZ HT R20/C3, Amber LiSi-POZ HT R20/C4, Amber LiSi-POZ HT R20/D2, Amber LiSi-POZ HT R20/D3, Amber LiSi-POZ HT R20/D4, Amber LiSi-POZ MO R20/0, Amber LiSi-POZ MO R20/1, Amber LiSi-POZ MO R20/2, Amber LiSi-POZ MO R20/3, Amber LiSi-POZ MO R20/4



Материал упаковки: PP (Полипропилен)

Размер: 95(ш)×30(д)×10(в) (Ед. изм: мм)



SAME AS ORIGINAL

Amber Mill

Варианты исполнения:

C32/W1, C32/W2, C32/W3, C32/W4, C32/A1, C32/A2, C32/A3, C32/A3.5, C32/A4, C32/B1, C32/B2, C32/B3, C32/B4, C32/C1, C32/C2, C32/C3, C32/C4, C32/D2, C32/D3, C32/D4,

C40/W1, C40/W2, C40/W3, C40/W4, C40/A1, C40/A2, C40/A3, C40/A3.5, C40/A4, C40/B1, C40/B2, C40/B3, C40/B4, C40/C1, C40/C2, C40/C3, C40/C4, C40/D2, C40/D3, C40/D4,

A7106/W1, A7106/W2, A7106/W3, A7106/W4, A7106/A1, A7106/A2, A7106/A3, A7106/A3.5, A7106/A4, A7106/B1, A7106/B2, A7106/B3, A7106/B4, A7106/C1, A7106/C2, A7106/C3, A7106/C4, A7106/D2, A7106/D3, A7106/D4,

A7108/W1, A7108/W2, A7108/W3, A7108/W4, A7108/A1, A7108/A2, A7108/A3, A7108/A3.5, A7108/A4, A7108/B1, A7108/B2, A7108/B3, A7108/B4, A7108/C1, A7108/C2, A7108/C3, A7108/C4, A7108/D2, A7108/D3, A7108/D4

A7110/W1, A7110/W2, A7110/W3, A7110/W4, A7110/A1, A7110/A2, A7110/A3, A7110/A3.5, A7110/A4, A7110/B1, A7110/B2, A7110/B3, A7110/B4, A7110/C1, A7110/C2, A7110/C3, A7110/C4, A7110/D2, A7110/D3, A7110/D4,

A7112/W1, A7112/W2, A7112/W3, A7112/W4, A7112/A1, A7112/A2, A7112/A3, A7112/A3.5, A7112/A4, A7112/B1, A7112/B2, A7112/B3, A7112/B4, A7112/C1, A7112/C2, A7112/C3, A7112/C4, A7112/D2, A7112/D3, A7112/D4

A7114/W1, A7114/W2, A7114/W3, A7114/W4, A7114/A1, A7114/A2, A7114/A3, A7114/A3.5, A7114/A4, A7114/B1, A7114/B2, A7114/B3, A7114/B4, A7114/C1, A7114/C2, A7114/C3, A7114/C4, A7114/D2, A7114/D3, A7114/D4,

A7116/W1, A7116/W2, A7116/W3, A7116/W4, A7116/A1, A7116/A2, A7116/A3, A7116/A3.5, A7116/A4, A7116/B1, A7116/B2, A7116/B3, A7116/B4, A7116/C1, A7116/C2, A7116/C3, A7116/C4, A7116/D2, A7116/D3, A7116/D4,

A7118/W1, A7118/W2, A7118/W3, A7118/W4, A7118/A1, A7118/A2, A7118/A3, A7118/A3.5, A7118/A4, A7118/B1, A7118/B2, A7118/B3, A7118/B4, A7118/C1, A7118/C2, A7118/C3, A7118/C4, A7118/D2, A7118/D3, A7118/D4,

A7120/W1, A7120/W2, A7120/W3, A7120/W4, A7120/A1, A7120/A2, A7120/A3, A7120/A3.5, A7120/A4, A7120/B1, A7120/B2, A7120/B3, A7120/B4, A7120/C1, A7120/C2, A7120/C3, A7120/C4, A7120/D2, A7120/D3, A7120/D4

Z9506/W1, Z9506/W2, Z9506/W3, Z9506/W4, Z9506/A1, Z9506/A2, Z9506/A3, Z9506/A3.5, Z9506/A4, Z9506/B1, Z9506/B2, Z9506/B3, Z9506/B4, Z9506/C1, Z9506/C2, Z9506/C3, Z9506/C4, Z9506/D2, Z9506/D3, Z9506/D4,

Z9508/W1, Z9508/W2, Z9508/W3, Z9508/W4, Z9508/A1, Z9508/A2, Z9508/A3, Z9508/A3.5, Z9508/A4, Z9508/B1, Z9508/B2, Z9508/B3, Z9508/B4, Z9508/C1, Z9508/C2, Z9508/C3, Z9508/C4, Z9508/D2, Z9508/D3, Z9508/D4,

Z9510/W1, Z9510/W2, Z9510/W3, Z9510/W4, Z9510/A1, Z9510/A2, Z9510/A3, Z9510/A3.5, Z9510/A4, Z9510/B1, Z9510/B2, Z9510/B3, Z9510/B4, Z9510/C1, Z9510/C2, Z9510/C3, Z9510/C4, Z9510/D2, Z9510/D3, Z9510/D4,

Z9512/W1, Z9512/W2, Z9512/W3, Z9512/W4, Z9512/A1, Z9512/A2, Z9512/A3, Z9512/A3.5, Z9512/A4, Z9512/B1, Z9512/B2, Z9512/B3, Z9512/B4, Z9512/C1, Z9512/C2, Z9512/C3, Z9512/C4, Z9512/D2, Z9512/D3, Z9512/D4,

Z9514/W1, Z9514/W2, Z9514/W3, Z9514/W4, Z9514/A1, Z9514/A2, Z9514/A3, Z9514/A3.5, Z9514/A4, Z9514/B1, Z9514/B2, Z9514/B3, Z9514/B4, Z9514/C1, Z9514/C2, Z9514/C3, Z9514/C4, Z9514/D2, Z9514/D3, Z9514/D4,

Z9516/W1, Z9516/W2, Z9516/W3, Z9516/W4, Z9516/A1, Z9516/A2, Z9516/A3, Z9516/A3.5, Z9516/A4, Z9516/B1, Z9516/B2, Z9516/B3, Z9516/B4, Z9516/C1, Z9516/C2, Z9516/C3, Z9516/C4, Z9516/D2, Z9516/D3, Z9516/D4,

Z9518/W1, Z9518/W2, Z9518/W3, Z9518/W4, Z9518/A1, Z9518/A2, Z9518/A3, Z9518/A3.5, Z9518/A4, Z9518/B1, Z9518/B2, Z9518/B3, Z9518/B4, Z9518/C1, Z9518/C2, Z9518/C3, Z9518/C4, Z9518/D2, Z9518/D3, Z9518/D4,

Z9520/W1, Z9520/W2, Z9520/W3, Z9520/W4, Z9520/A1, Z9520/A2, Z9520/A3, Z9520/A3.5, Z9520/A4, Z9520/B1, Z9520/B2, Z9520/B3, Z9520/B4, Z9520/C1, Z9520/C2, Z9520/C3, Z9520/C4, Z9520/D2, Z9520/D3, Z9520/D4,

P9806/W1, P9806/W2, P9806/W3, P9806/W4, P9806/A1, P9806/A2, P9806/A3, P9806/A3.5, P9806/A4,

P9806/B1, P9806/B2, P9806/B3, P9806/B4, P9806/C1, P9806/C2, P9806/C3, P9806/C4, P9806/D2, P9806/D3, P9806/D4,

P9808/W1, P9808/W2, P9808/W3, P9808/W4, P9808/A1, P9808/A2, P9808/A3, P9808/A3.5, P9808/A4, P9808/B1, P9808/B2, P9808/B3, P9808/B4, P9808/C1, P9808/C2, P9808/C3, P9808/C4, P9808/D2, P9808/D3, P9808/D4,

P9810/W1, P9810/W2, P9810/W3, P9810/W4, P9810/A1, P9810/A2, P9810/A3, P9810/A3.5, P9810/A4, P9810/B1, P9810/B2, P9810/B3, P9810/B4, P9810/C1, P9810/C2, P9810/C3, P9810/C4, P9810/D2, P9810/D3, P9810/D4,

P9812/W1, P9812/W2, P9812/W3, P9812/W4, P9812/A1, P9812/A2, P9812/A3, P9812/A3.5, P9812/A4, P9812/B1, P9812/B2, P9812/B3, P9812/B4, P9812/C1, P9812/C2, P9812/C3, P9812/C4, P9812/D2, P9812/D3, P9812/D4,

P9814/W1, P9814/W2, P9814/W3, P9814/W4, P9814/A1, P9814/A2, P9814/A3, P9814/A3.5, P9814/A4, P9814/B1, P9814/B2, P9814/B3, P9814/B4, P9814/C1, P9814/C2, P9814/C3, P9814/C4, P9814/D2, P9814/D3, P9814/D4,


P9816/W1, P9816/W2, P9816/W3, P9816/W4, P9816/A1, P9816/A2, P9816/A3, P9816/A3.5, P9816/A4, P9816/B1, P9816/B2, P9816/B3, P9816/B4, P9816/C1, P9816/C2, P9816/C3, P9816/C4, P9816/D2, P9816/D3, P9816/D4,

P9818/W1, P9818/W2, P9818/W3, P9818/W4, P9818/A1, P9818/A2, P9818/A3, P9818/A3.5, P9818/A4, P9818/B1, P9818/B2, P9818/B3, P9818/B4, P9818/C1, P9818/C2, P9818/C3, P9818/C4, P9818/D2, P9818/D3, P9818/D4


P9820/W1, P9820/W2, P9820/W3, P9820/W4, P9820/A1, P9820/A2, P9820/A3, P9820/A3.5, P9820/A4, P9820/B1, P9820/B2, P9820/B3, P9820/B4, P9820/C1, P9820/C2, P9820/C3, P9820/C4, P9820/D2, P9820/D3, P9820/D4

Материал: ССР (Литая мелованная бумага) & Матовое ламинирование

- Размер: 143(ш)×133(д)×38(в) (Ед.изм.: мм)

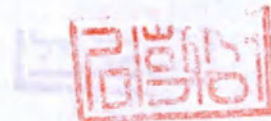

SAME AS ORIGINAL

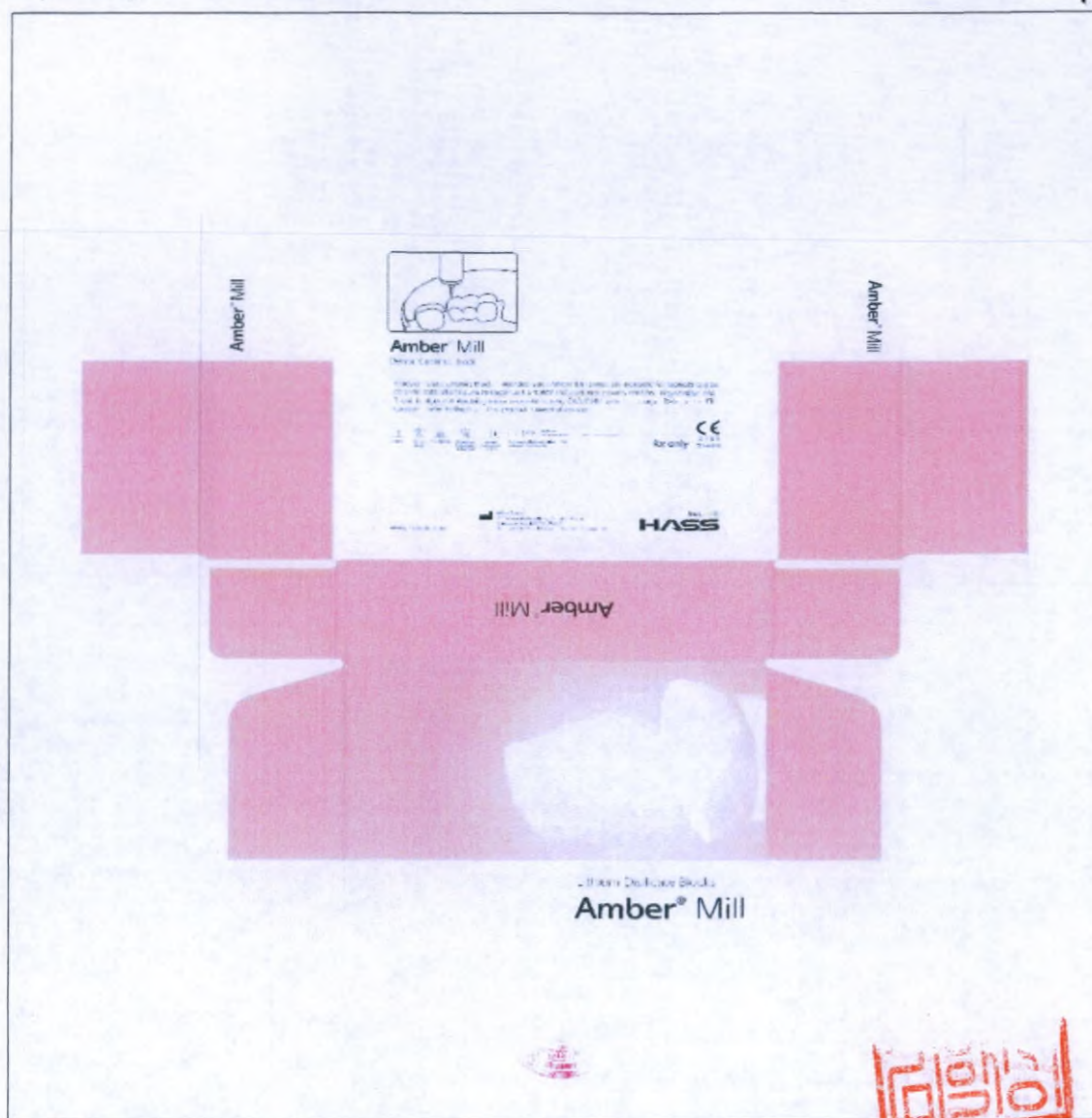

Amber Mill

Dental Ceramic Blocks

- Product: Glass Ceramic Blocks.

Intended Use: Amber Mill Series are indicated for fabricating glass ceramic restoration such as single-unit anterior and posterior crowns, veneers, inlays/onlays, anterior 3-unit bridges using CAD/CAM System.

Usage: Refer to the IFU Caution Refer to the IFU.

- This product is medical device.

Amber Mill

Изделие: Стоматологические Керамические блоки

- Предназначение: для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как: единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки / накладки и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области с использованием системы CAD/CAM.

Обращение: см. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности: см.Инструкции по эксплуатации.

- Данный продукт является медицинским изделием.

SAME AS ORIGINAL




Amber Mill Meso

Варианты исполнения:

C14/W1(S), C14/W2(S), C14/W3(S), C14/W4(S), C14/A1(S), C14/A2(S), C14/A3(S), C14/A3.5(S), C14/A4(S), C14/B1(S), C14/B2(S), C14/B3(S), C14/B4(S), C14/C1(S), C14/C2(S), C14/C3(S), C14/C4(S), C14/D2(S), C14/D3(S), C14/D4(S), C14/W1(L), C14/W2(L), C14/W3(L), C14/W4(L), C14/A1(L), C14/A2(L), C14/A3(L), C14/A3.5(L), C14/A4(L), C14/B1(L), C14/B2(L), C14/B3(L), C14/B4(L), C14/C1(L), C14/C2(L), C14/C3(L), C14/C4(L), C14/D2(L), C14/D3(L), C14/D4(L), C16/W1(S), C16/W2(S), C16/W3(S), C16/W4(S), C16/A1(S), C16/A2(S), C16/A3(S), C16/A3.5(S), C16/A4(S), C16/B1(S), C16/B2(S), C16/B3(S), C16/B4(S), C16/C1(S), C16/C2(S), C16/C3(S), C16/C4(S), C16/D2(S), C16/D3(S), C16/D4(S), C16/W1(L), C16/W2(L), C16/W3(L), C16/W4(L), C16/A1(L), C16/A2(L), C16/A3(L), C16/A3.5(L), C16/A4(L), C16/B1(L), C16/B2(L), C16/B3(L), C16/B4(L), C16/C1(L), C16/C2(L), C16/C3(L), C16/C4(L), C16/D2(L), C16/D3(L), C16/D4(L)

Материал: ССР (Литая мелованная бумага) & Матовое ламинирование

Размер: 110(ш)×50(д)×22(в) (Ед.изм.: мм)

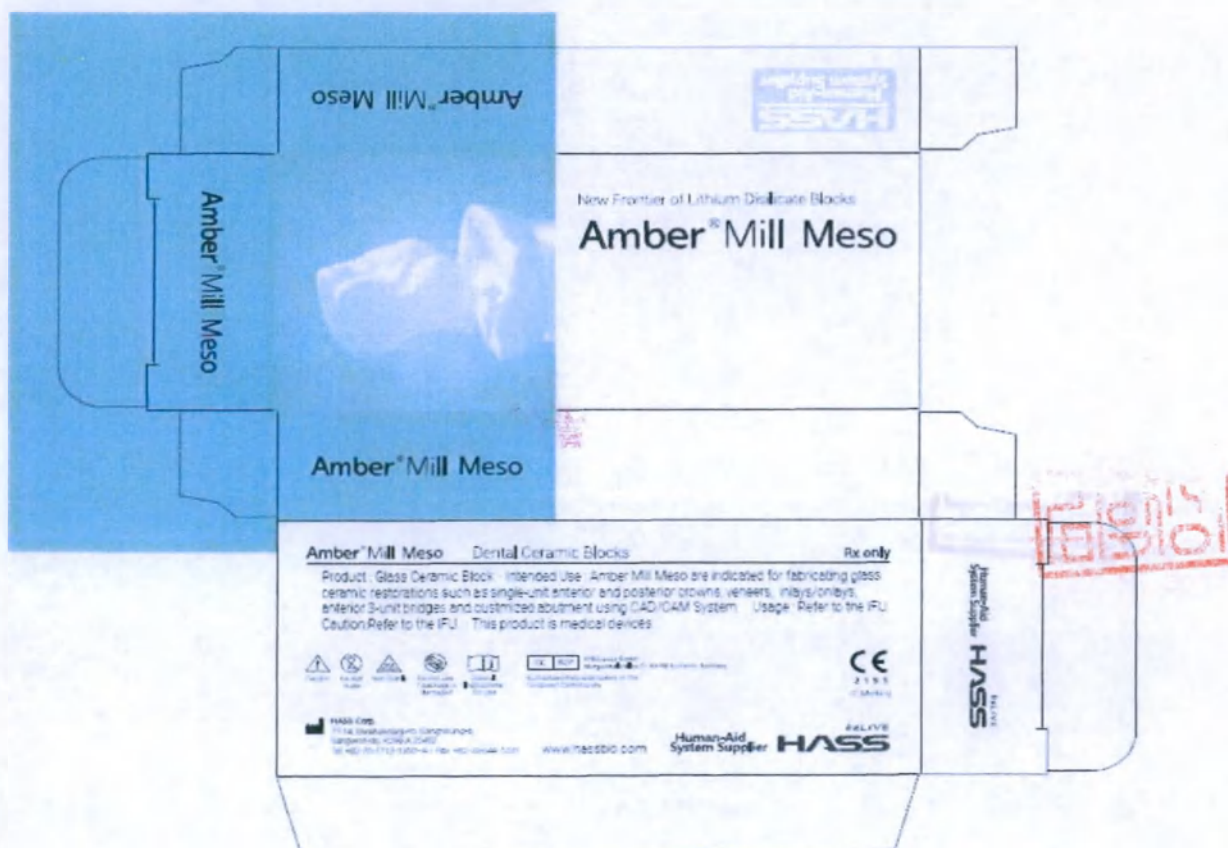

Amber Mill Meso

Dental Ceramic Blocks

- Product: Glass Ceramic Blocks.

Intended Use: Amber Mill Meso are indicated for fabricating glass ceramic restorations such as single-unit anterior and posterior crowns, veneers, inlays/onlays, anterior 3-unit bridges and customized abutment using CAD/CAM System.

Usage: Refer to the IFU Caution Refer to the IFU.

- This product is medical devices.

Amber Mill Meso

Изделие: Стоматологические Керамические блоки

- Предназначение: для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как: единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки / накладки, мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области и индивидуальные абатменты с использованием системы CAD/CAM.

Обращение: см. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности: см. Инструкции по эксплуатации.

- Данный продукт является медицинским изделием.

SAME AS ORIGINAL

Варианты исполнения:

SAME AS ORIGINAL

Amber Mill Q HT C14/W
Amber Mill Q H
BL, Amber Mill Q H
TR4 8L Amber M

umber Mill Q LT C
umber Mill Q LT C
umber Mill Q LT C
umber Mill Q LT C
OS Archer Mill C

 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Q MT C16/D2 TB
Q MO C16/0 TB
Q MO C16/3 TB
Q LT C16/W2 TB

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ber Mill Q MO C
ber Mill Q LT C1
ber Mill Q LT C1
ber Mill Q LT C16

T C16/A2 TB3.5L, Am
Q MT C16/A4 TB3.5L,
r Mill Q MT C16/B3 T
ber Mill Q MT C16/C2

Amber Mill Q MT C16/C3 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/C4 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/D2 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/D3 TB3.5L, Amber Mill Q MT C16/D4 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/0 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/1 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/2 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/3 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/4 TB3.5L, Amber Mill Q LT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/0 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/1 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/2 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/3 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/4 TB4.8L

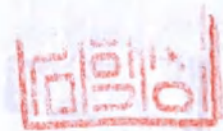

SAME AS ORIGINAL

Материал: ССР (Литая мелованная бумага) & Матовое ламинирование
Размер: 110(ш) × 50(д) × 22(в) (Ед.изм: мм)



Amber Mill Q

Dental Ceramic Blocks

- Product: Glass Ceramic Blocks.

Intended Use: Amber Mill Series are indicated for fabricating glass ceramic restoration such as single-unit anterior and posterior crowns, veneers, inlays/onlays, anterior 3-unit bridges and customized abutment using CAD/CAM System.

Usage: Refer to the IFU Caution Refer to the IFU.

- This product is medical devices.

Amber Mill Q

Изделие: Стоматологические Керамические блоки

- Предназначение: для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как: единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки / накладки, мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области, индивидуальные абатменты с использованием системы CAD/CAM.

Обращение: см. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности: см. Инструкции по эксплуатации.

- Данный продукт является медицинским изделием.

SAME AS ORIGINAL

Варианты исполнения:

SAME AS ORIGINAL

Direct MT C16/A4, Amber Mill Direct MT C16/B1, Amber Mill Direct MT C16/B2, Amber Mill Direct MT C16/B3, Amber Mill Direct MT C16/B4, Amber Mill Direct MT C16/C1, Amber Mill Direct MT C16/C2, Amber Mill Direct MT C16/C3, Amber Mill Direct MT C16/C4, Amber Mill Direct MT C16/D2, Amber Mill Direct MT C16/D3, Amber Mill Direct MT C16/D4, Amber Mill Direct MO C16/0, Amber Mill Direct MO C16/1, Amber Mill Direct MO C16/2, Amber Mill Direct MO C16/3, Amber Mill Direct MO C16/4

Материал: ССР (Литая мелованная бумага) & Матовое ламинирование

Размер: 110(ш) × 50(д) × 22(в) (Ед.изм: мм)



Amber Mill Direct

Dental Ceramic Blocks

- Product: Glass Ceramic Blocks.

Intended Use: Amber Mill Direct are indicated for fabricating glass ceramic restoration such as single-unit anterior and posterior crowns, veneers, inlays/onlays, anterior 3-unit bridges using CAD/CAM System.

Usage: Refer to the IFU Caution Refer to the IFU.

- This product is medical devices.

Amber Mill Direct

Изделие: Стоматологические Керамические блоки

- Предназначение: для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как: единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки / накладки и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области с использованием системы CAD/CAM.

Обращение: см. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности: см. Инструкции по эксплуатации.

- Данный продукт является медицинским изделием.

SAME AS ORIGINAL

[блоки для прессования]

Amber Press

Варианты исполнения:


Amber Press LT R7/W1, Amber Press LT R7/W2, Amber Press LT R7/W3, Amber Press LT R7/W4, Amber Press LT R7/A1, Amber Press LT R7/A2, Amber Press LT R7/A3, Amber Press LT R7/A3.5, Amber Press LT R7/A4, Amber Press LT R7/B1, Amber Press LT R7/B2, Amber Press LT R7/B3, Amber Press LT R7/B4, Amber Press LT R7/C1, Amber Press LT R7/C2, Amber Press LT R7/C3, Amber Press LT R7/C4, Amber Press LT R7/D2, Amber Press LT R7/D3, Amber Press LT R7/D4, Amber Press HT R7/W0, Amber Press HT R7/W1, Amber Press HT R7/W2, Amber Press HT R7/W3, Amber Press HT R7/W4, Amber Press HT R7/A1, Amber Press HT R7/A2, Amber Press HT R7/A3, Amber Press HT R7/A3.5, Amber Press HT R7/A4, Amber Press HT R7/B1, Amber Press HT R7/B2, Amber Press HT R7/B3, Amber Press HT R7/B4, Amber Press HT R7/C1, Amber Press HT R7/C2, Amber Press HT R7/C3, Amber Press HT R7/C4, Amber Press HT R7/D2, Amber Press HT R7/D3, Amber Press HT R7/D4, Amber Press MO R7/0, Amber Press MO R7/1, Amber Press MO R7/2, Amber Press MO R7/3, Amber Press MO R7/4, Amber Press LT R10/W1, Amber Press LT R10/W2, Amber Press LT R10/W3, Amber Press LT R10/W4, Amber Press LT R10/A1, Amber Press LT R10/A2, Amber Press LT R10/A3, Amber Press LT R10/A3.5, Amber Press LT R10/A4, Amber Press LT R10/B1, Amber Press LT R10/B2, Amber Press LT R10/B3, Amber Press LT R10/B4, Amber Press LT R10/C1, Amber Press LT R10/C2, Amber Press LT R10/C3, Amber Press LT R10/C4, Amber Press LT R10/D2, Amber Press LT R10/D3, Amber Press LT R10/D4, Amber Press HT R10/W0, Amber Press HT R10/W1, Amber Press HT R10/W2, Amber Press HT R10/W3, Amber Press HT R10/W4, Amber Press HT R10/A1, Amber Press HT R10/A2, Amber Press HT R10/A3, Amber Press HT R10/A3.5, Amber Press HT R10/A4, Amber Press HT R10/B1, Amber Press HT R10/B2, Amber Press HT R10/B3, Amber Press HT R10/B4, Amber Press HT R10/C1, Amber Press HT R10/C2, Amber Press HT R10/C3, Amber Press HT R10/C4, Amber Press HT R10/D2, Amber Press HT R10/D3, Amber Press HT R10/D4, Amber Press MO R10/0, Amber Press MO R10/1, Amber Press MO R10/2, Amber Press MO R10/3, Amber Press MO R10/4, Amber Press LT R15/W1, Amber Press LT R15/W2, Amber Press LT R15/W3, Amber Press LT R15/W4, Amber Press LT R15/A1, Amber Press LT R15/A2, Amber Press LT R15/A3, Amber Press LT R15/A3.5, Amber Press LT R15/A4, Amber Press LT R15/B1, Amber Press LT R15/B2, Amber Press LT R15/B3, Amber Press LT R15/B4, Amber Press LT R15/C1, Amber Press LT R15/C2, Amber Press LT R15/C3, Amber Press LT R15/C4, Amber Press LT R15/D2, Amber Press LT R15/D3, Amber Press LT R15/D4, Amber Press HT R15/W0, Amber Press HT R15/W1, Amber Press HT R15/W2, Amber Press HT R15/W3, Amber Press HT R15/W4, Amber Press HT R15/A1, Amber Press HT R15/A2, Amber Press HT R15/A3, Amber Press HT R15/A3.5, Amber Press HT R15/A4, Amber Press HT R15/B1, Amber Press HT R15/B2, Amber Press HT R15/B3, Amber Press HT R15/B4, Amber Press HT R15/C1, Amber Press HT R15/C2, Amber Press HT R15/C3, Amber Press HT R15/C4, Amber Press HT R15/D2, Amber Press HT R15/D3, Amber Press HT R15/D4, Amber Press MO R15/0, Amber Press MO R15/1, Amber Press MO R15/2, Amber Press MO R15/3, Amber Press MO R15/4, Amber Press LT R20/W1, Amber Press LT R20/W2, Amber Press LT R20/W3, Amber Press LT R20/W4, Amber Press LT R20/A1, Amber Press LT R20/A2, Amber Press LT R20/A3, Amber Press LT R20/A3.5, Amber Press LT R20/A4, Amber Press LT R20/B1, Amber Press LT R20/B2, Amber Press LT R20/B3, Amber Press LT R20/B4, Amber Press LT R20/C1, Amber Press LT R20/C2, Amber Press LT R20/C3, Amber Press LT R20/C4, Amber Press LT R20/D2, Amber Press LT R20/D3, Amber Press LT R20/D4, Amber Press HT R20/W0, Amber Press HT R20/W1, Amber Press HT R20/W2, Amber Press HT R20/W3, Amber Press HT R20/W4, Amber Press HT R20/A1, Amber Press HT R20/A2, Amber Press HT R20/A3, Amber Press HT R20/A3.5, Amber Press HT R20/A4, Amber Press HT R20/B1, Amber Press HT R20/B2, Amber Press HT R20/B3, Amber Press HT R20/B4, Amber Press HT R20/C1, Amber Press HT R20/C2, Amber Press HT R20/C3, Amber Press HT R20/C4, Amber Press HT R20/D2, Amber Press HT R20/D3, Amber Press HT R20/D4, Amber Press MO R20/0, Amber Press MO R20/1, Amber Press MO R20/2, Amber Press MO R20/3, Amber Press MO R20/4

SAME AS ORIGINAL



Материал: ССР (Литая мелованная бумага) & Матовое ламинирование

Размер: 100(ш) × 32(д) × 17(в) (Ед.изм: мм)

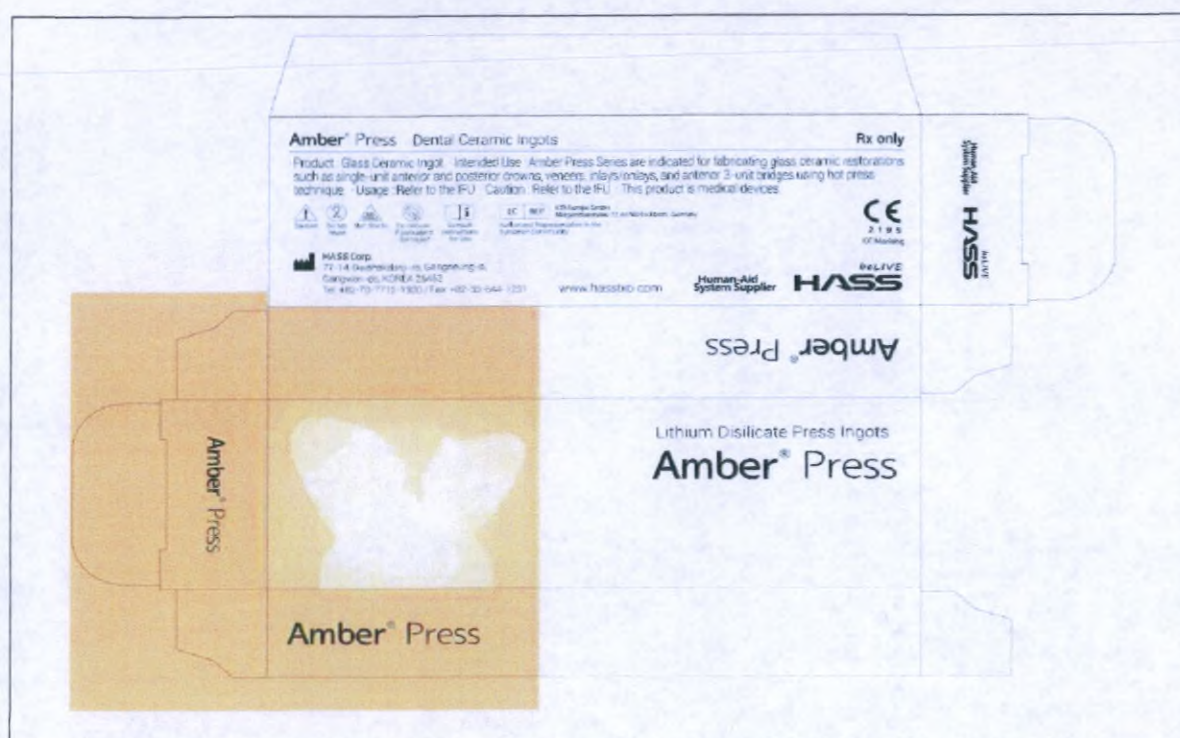

Amber Press

Dental Ceramic Ingots

- Product: Glass Ceramic Blocks.

Intended Use: Amber Press Series are indicated for fabricating glass ceramic restoration such as single-unit anterior and posterior crowns, veneers, inlays/onlays, anterior 3-unit bridges using hot press technique.

Usage: Refer to the IFU Caution Refer to the IFU.

- This product is medical devices.

Amber Press

Изделие: Стоматологические Керамические блоки

- Предназначение: для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как: единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки / накладки и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области с использованием техники прессования.

Обращение: см. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности: см.Инструкции по эксплуатации.

- Данный продукт является медицинским изделием.

SAME AS ORIGINAL


Amber Press Master

Варианты исполнения:

Amber Press Master MT R10/W0.5, Amber Press Master MT R10/A0.5, Amber Press Master MT R10/A1.5, Amber Press Master MT R10/A2.5, Amber Press Master HT+ R10/W0.5, Amber Press Master HT+ R10/A0.5, Amber Press Master HT+ R10/A1.5, Amber Press Master HT+ R10/A2.5, Amber Press Master HT+ R10/A3.5, Amber Press Master LO R10/0, Amber Press Master LO R10/1, Amber Press Master LO R10/2, Amber Press Master LO R10/3, Amber Press Master MT R20/W0.5, Amber Press Master MT R20/A0.5, Amber Press Master MT R20/A1.5, Amber Press Master MT R20/A2.5, Amber Press Master HT+ R20/W0.5, Amber Press Master HT+ R20/A0.5, Amber Press Master HT+ R20/A1.5, Amber Press Master HT+ R20/A2.5, Amber Press Master HT+ R20/A3.5, Amber Press Master LO R20/0, Amber Press Master LO R20/1, Amber Press Master LO R20/2, Amber Press Master LO R20/3

Материал: ССР (Литая мелованная бумага) & Матовое ламинирование

Размер: 92(ш) × 18(д) × 12(в) (Ед. изм: мм)

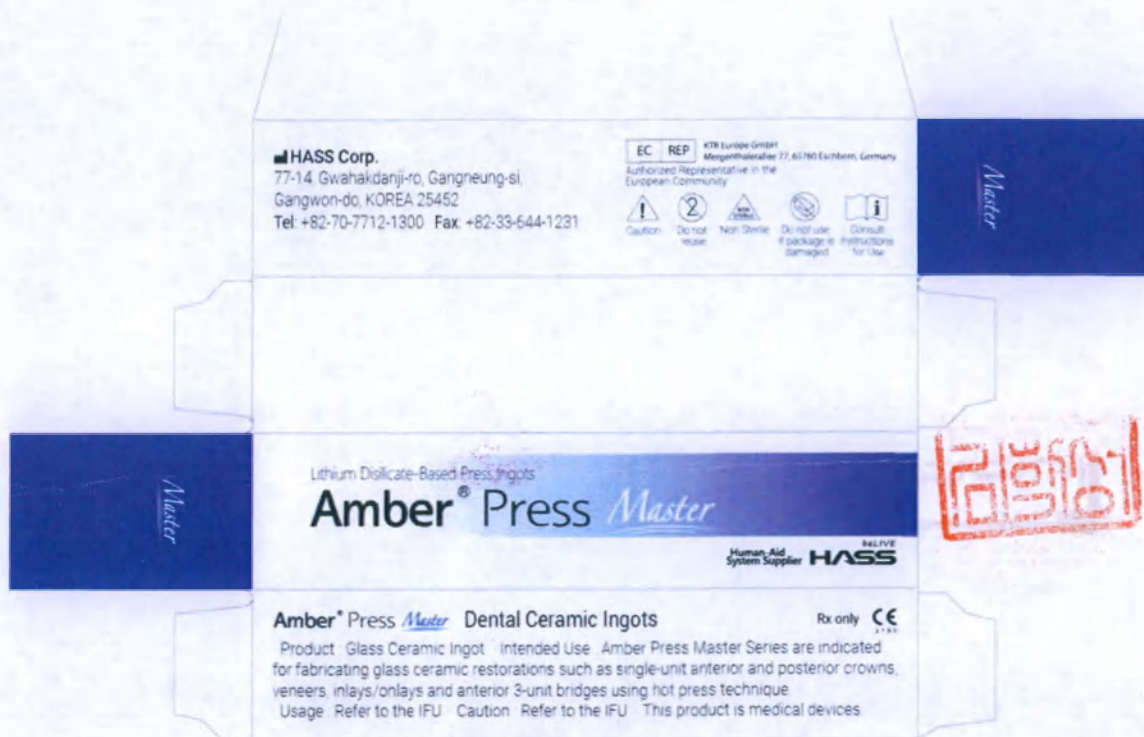

Amber Press Master

Dental Ceramic Ingots

- Product: Glass Ceramic Ingots.

Intended Use: Amber Press Master Series are indicated for fabricating glass ceramic restoration such as single-unit anterior and posterior crowns, veneers, inlays/onlays, anterior 3-unit bridges using hot press technique.

Usage: Refer to the IFU Caution Refer to the IFU.

- This product is medical devices.

Amber Press Master

Изделие: Стоматологические Керамические блоки

- Предназначение: для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как: единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки / накладки и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области с использованием техники прессования.

Обращение: см. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности: см. Инструкции по эксплуатации.

- Данный продукт является медицинским изделием.

SAME AS ORIGINAL


Amber LiSi-POZ

Варианты исполнения:

Amber LiSi-POZ LT R7/W1, Amber LiSi-POZ LT R7/W2, Amber LiSi-POZ LT R7/W3, Amber LiSi-POZ LT R7/W4, Amber LiSi-POZ LT R7/A1, Amber LiSi-POZ LT R7/A2, Amber LiSi-POZ LT R7/A3, Amber LiSi-POZ LT R7/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R7/A4, Amber LiSi-POZ LT R7/B1, Amber LiSi-POZ LT R7/B2, Amber LiSi-POZ LT R7/B3, Amber LiSi-POZ LT R7/B4, Amber LiSi-POZ LT R7/C1, Amber LiSi-POZ LT R7/C2, Amber LiSi-POZ LT R7/C3, Amber LiSi-POZ LT R7/C4, Amber LiSi-POZ LT R7/D2, Amber LiSi-POZ LT R7/D3, Amber LiSi-POZ LT R7/D4, Amber LiSi-POZ HT R7/W0, Amber LiSi-POZ HT R7/W1, Amber LiSi-POZ HT R7/W2, Amber LiSi-POZ HT R7/W3, Amber LiSi-POZ HT R7/W4, Amber LiSi-POZ HT R7/A1, Amber LiSi-POZ HT R7/A2, Amber LiSi-POZ HT R7/A3, Amber LiSi-POZ HT R7/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R7/A4, Amber LiSi-POZ HT R7/B1, Amber LiSi-POZ HT R7/B2, Amber LiSi-POZ HT R7/B3, Amber LiSi-POZ HT R7/B4, Amber LiSi-POZ HT R7/C1, Amber LiSi-POZ HT R7/C2, Amber LiSi-POZ HT R7/C3, Amber LiSi-POZ HT R7/C4, Amber LiSi-POZ HT R7/D2, Amber LiSi-POZ HT R7/D3, Amber LiSi-POZ HT R7/D4, Amber LiSi-POZ MO R7/0, Amber LiSi-POZ MO R7/1, Amber LiSi-POZ MO R7/2, Amber LiSi-POZ MO R7/3, Amber LiSi-POZ MO R7/4, Amber LiSi-POZ LT R10/W1, Amber LiSi-POZ LT R10/W2, Amber LiSi-POZ LT R10/W3, Amber LiSi-POZ LT R10/W4, Amber LiSi-POZ LT R10/A1, Amber LiSi-POZ LT R10/A2, Amber LiSi-POZ LT R10/A3, Amber LiSi-POZ LT R10/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R10/A4, Amber LiSi-POZ LT R10/B1, Amber LiSi-POZ LT R10/B2, Amber LiSi-POZ LT R10/B3, Amber LiSi-POZ LT R10/B4, Amber LiSi-POZ LT R10/C1, Amber LiSi-POZ LT R10/C2, Amber LiSi-POZ LT R10/C3, Amber LiSi-POZ LT R10/C4, Amber LiSi-POZ LT R10/D2, Amber LiSi-POZ LT R10/D3, Amber LiSi-POZ LT R10/D4, Amber LiSi-POZ HT R10/W0, Amber LiSi-POZ HT R10/W1, Amber LiSi-POZ HT R10/W2, Amber LiSi-POZ HT R10/W3, Amber LiSi-POZ HT R10/W4, Amber LiSi-POZ HT R10/A1, Amber LiSi-POZ HT R10/A2, Amber LiSi-POZ HT R10/A3, Amber LiSi-POZ HT R10/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R10/A4, Amber LiSi-POZ HT R10/B1, Amber LiSi-POZ HT R10/B2, Amber LiSi-POZ HT R10/B3, Amber LiSi-POZ HT R10/B4, Amber LiSi-POZ HT R10/C1, Amber LiSi-POZ HT R10/C2, Amber LiSi-POZ HT R10/C3, Amber LiSi-POZ HT R10/C4, Amber LiSi-POZ HT R10/D2, Amber LiSi-POZ HT R10/D3, Amber LiSi-POZ HT R10/D4, Amber LiSi-POZ MO R10/0, Amber LiSi-POZ MO R10/1, Amber LiSi-POZ MO R10/2, Amber LiSi-POZ MO R10/3, Amber LiSi-POZ MO R10/4, Amber LiSi-POZ LT R15/W1, Amber LiSi-POZ LT R15/W2, Amber LiSi-POZ LT R15/W3, Amber LiSi-POZ LT R15/W4, Amber LiSi-POZ LT R15/A1, Amber LiSi-POZ LT R15/A2, Amber LiSi-POZ LT R15/A3, Amber LiSi-POZ LT R15/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R15/A4, Amber LiSi-POZ LT R15/B1, Amber LiSi-POZ LT R15/B2, Amber LiSi-POZ LT R15/B3, Amber LiSi-POZ LT R15/B4, Amber LiSi-POZ LT R15/C1, Amber LiSi-POZ LT R15/C2, Amber LiSi-POZ LT R15/C3, Amber LiSi-POZ LT R15/C4, Amber LiSi-POZ LT R15/D2, Amber LiSi-POZ LT R15/D3, Amber LiSi-POZ LT R15/D4, Amber LiSi-POZ HT R15/W0, Amber LiSi-POZ HT R15/W1, Amber LiSi-POZ HT R15/W2, Amber LiSi-POZ HT R15/W3, Amber LiSi-POZ HT R15/W4, Amber LiSi-POZ HT R15/A1, Amber LiSi-POZ HT R15/A2, Amber LiSi-POZ HT R15/A3, Amber LiSi-POZ HT R15/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R15/A4, Amber LiSi-POZ HT R15/B1, Amber LiSi-POZ HT R15/B2, Amber LiSi-POZ HT R15/B3, Amber LiSi-POZ HT R15/B4, Amber LiSi-POZ HT R15/C1, Amber LiSi-POZ HT R15/C2, Amber LiSi-POZ HT R15/C3, Amber LiSi-POZ HT R15/C4, Amber LiSi-POZ HT R15/D2, Amber LiSi-POZ HT R15/D3, Amber LiSi-POZ HT R15/D4, Amber LiSi-POZ MO R15/0, Amber LiSi-POZ MO R15/1, Amber LiSi-POZ MO R15/2, Amber LiSi-POZ MO R15/3, Amber LiSi-POZ MO R15/4, Amber LiSi-POZ LT R20/W1, Amber LiSi-POZ LT R20/W2, Amber LiSi-POZ LT R20/W3, Amber LiSi-POZ LT R20/W4, Amber LiSi-POZ LT R20/A1, Amber LiSi-POZ LT R20/A2, Amber LiSi-POZ LT R20/A3, Amber LiSi-POZ LT R20/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R20/A4, Amber LiSi-POZ LT R20/B1, Amber LiSi-POZ LT R20/B2, Amber LiSi-POZ LT R20/B3, Amber LiSi-POZ LT R20/B4, Amber LiSi-POZ LT R20/C1, Amber LiSi-POZ LT R20/C2, Amber LiSi-POZ LT R20/C3, Amber LiSi-POZ LT R20/C4, Amber LiSi-POZ LT R20/D2, Amber LiSi-POZ LT R20/D3, Amber LiSi-POZ LT R20/D4, Amber LiSi-POZ HT R20/W0, Amber LiSi-POZ HT R20/W1, Amber LiSi-POZ HT R20/W2, Amber LiSi-POZ HT R20/W3, Amber LiSi-POZ HT R20/W4, Amber LiSi-POZ HT R20/A1, Amber LiSi-POZ HT R20/A2, Amber LiSi-POZ HT R20/A3, Amber LiSi-POZ HT R20/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R20/A4, Amber LiSi-POZ HT R20/B1, Amber LiSi-POZ HT R20/B2, Amber LiSi-POZ HT R20/B3, Amber LiSi-POZ HT R20/B4, Amber LiSi-POZ HT R20/C1, Amber LiSi-POZ HT R20/C2, Amber LiSi-POZ HT R20/C3, Amber LiSi-POZ HT R20/C4, Amber LiSi-POZ HT R20/D2, Amber LiSi-POZ HT R20/D3, Amber LiSi-POZ HT R20/D4, Amber LiSi-POZ MO R20/0, Amber LiSi-POZ MO R20/1, Amber LiSi-POZ MO R20/2, Amber LiSi-POZ MO R20/3, Amber LiSi-POZ MO R20/4

SAME AS ORIGINAL

Материал: ССР (Литая мелованная бумага) & Матовое ламинирование
Размер: 100(ш)×32(д)×17(в) (Ед.изм: мм)

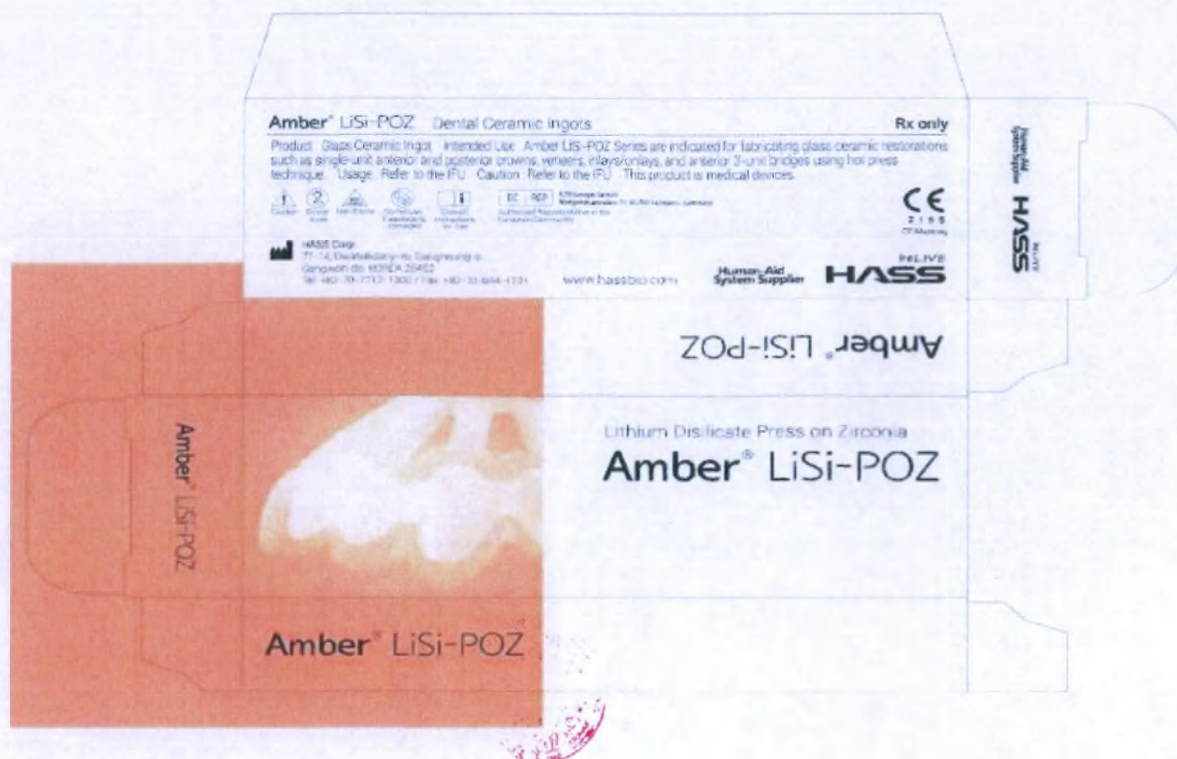

Amber LiSi-POZ

Dental Ceramic Ingots

- Product: Glass Ceramic Ingots.

Intended Use: Amber LiSi-POZ Series are indicated for fabricating glass ceramic restoration such as single-unit anterior and posterior crowns, veneers, inlays/onlays, anterior 3-unit bridges using hot press technique.

Usage: Refer to the IFU Caution Refer to the IFU.

- This product is medical devices.

Amber LiSi-POZ

Изделие: Стоматологические Керамические блоки

- Предназначение: для изготовления стеклокерамических реставраций, таких как: единичные коронки на передние и боковые зубы, виниры, вкладки / накладки и мостовидные протезы на 3 единицы во фронтальной области с использованием техники прессования.

Обращение: см. Инструкции по эксплуатации. Меры предосторожности: см.Инструкции по эксплуатации.

- Данный продукт является медицинским изделием.

SAME AS ORIGINAL

Символы, применяемые при маркировке

NO	Пиктограмма	Значения символов
1		Не использовать повторно
2		Каталожный номер
3		Номер серии, партии
4		Не использовать, если упаковка повреждена
5		Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
6	Rx only	Предостережение. Согласно федеральному законодательству (США) данное изделие может продаваться только врачу или по заказу врача
7		Предостережение
8		Ознакомьтесь с Инструкцией по применению
9		Дата изготовления
10		Производитель
11		Нестерильно
12		Знак СЕ. Изделие соответствует основным требованиям Директивы ЕС


SAME AS ORIGINAL

Проект маркировки (стикера) для поставки в РФ

Amber Mill блоки стеклокерамические

Материалы стоматологические реставрационные Amber

Регистрационное удостоверение N .../... От .../.../...

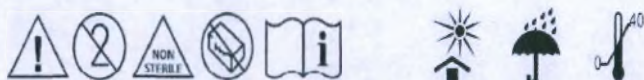

УП | РФ | ООО «Научно-исследовательский институт цифровой стоматологии и функциональной диагностики»
ул. Электродная, 10, Москва, 111524

www.hassbio.com


Customer Support: +82-2-2083-1367

Производитель: HASS CORPORATION («ХАСС КОРПОРЕЙШН»), Р.Корея
77-14, Gwahakdanji-ro, Gangneung-si, Gang-won-do, Korea 25452

Human-Aid
System Supplier

beLIVE

HASS

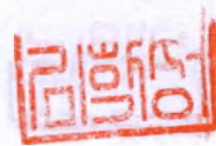

SAME AS ORIGINAL

15. Транспортировка и хранение

Транспортировку осуществлять в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка любыми средствами транспорта, в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность груза.

Хранение

Хранить изделие в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от 0°C ~ 40°C, при относительной влажности воздуха 10% ~ 90%, атмосферном давлении в диапазоне от 500 гПа до 1060 гПа. Не хранить в загрязненном месте или открытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, прямых солнечных лучей.

16. Условия эксплуатации и срок годности

Эксплуатировать изделие при нормальной комнатной температуре от 0 до 25°C, при относительной влажности воздуха 10% ~ 90%.

Срок годности данного медицинского изделия составляет 5 лет. После окончания срока годности, данное медицинское изделие необходимо утилизировать.

По результатам испытания срока годности было подтверждено, что данный материал может храниться до 10 лет без каких-либо физических или биологических изменений.

17. Гарантии производителя

Персонал, работающий с изделием (зубные техники, врачи) должен обладать соответствующими знаниями и навыками работы с изделиями AMBER, описанными в данном документе, для безопасного и надлежащего использования продукции в соответствии с инструкцией по применению.

Ответственность за использование данного изделия в соответствии с инструкцией по применению и за определение целесообразности использования данного изделия в каждом конкретном случае несет врач/зубной техник.


Материал реставрационный AMBER не содержит опасных веществ, требующих специальных мер при обращении.

18. Утилизация и охрана окружающей среды

После истечения срока годности или использования продукта утилизировать продукт на предназначенной для этого свалке или на мусоросжигательном заводе в условиях, одобренных местными властями.

Рекомендуется сжигание.

Утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами, действующими в месте утилизации.

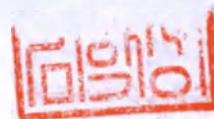

SAME AS ORIGINAL

19. Уполномоченный представитель производителя в РФ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт цифровой стоматологии и функциональной диагностики» (ООО «НИИ ЦСФД»),

111524, г. Москва, ул. Электродная, 10, пом. VI, этаж 3, ком. 12А, Россия.

тел. +7 (800) 600-41-22

Электронная почта: info@csfd.ru



SAME AS ORIGINAL

1. Amber Mill: C5/W1, C5/W2, C5/W3, C5/W4, C5/A1, C5/A2, C5/A3, C5/A3.5, C5/A4, C5/B1, C5/B2, C5/B3, C5/B4, C5/C1, C5/C2, C5/C3, C5/C4, C5/D2, C5/D3, C5/D4, C8/W1, C8/W2, C8/W3, C8/W4, C8/A1, C8/A2, C8/A3, C8/A3.5, C8/A4, C8/B1, C8/B2, C8/B3, C8/B4, C8/C1, C8/C2, C8/C3, C8/C4, C8/D2, C8/D3, C8/D4, C10/W1, C10/W2, C10/W3, C10/W4, C10/A1, C10/A2, C10/A3, C10/A3.5, C10/A4, C10/B1, C10/B2, C10/B3, C10/B4, C10/C1, C10/C2, C10/C3, C10/C4, C10/D2, C10/D3, C10/D4, C12/W1, C12/W2, C12/W3, C12/W4, C12/A1, C12/A2, C12/A3, C12/A3.5, C12/A4, C12/B1, C12/B2, C12/B3, C12/B4, C12/C1, C12/C2, C12/C3, C12/C4, C12/D2, C12/D3, C12/D4, C14/W1, C14/W2, C14/W3, C14/W4, C14/A1, C14/A2, C14/A3, C14/A3.5, C14/A4, C14/B1, C14/B2, C14/B3, C14/B4, C14/C1, C14/C2, C14/C3, C14/C4, C14/D2, C14/D3, C14/D4, C16/W1, C16/W2, C16/W3, C16/W4, C16/A1, C16/A2, C16/A3, C16/A3.5, C16/A4, C16/B1, C16/B2, C16/B3, C16/B4, C16/C1, C16/C2, C16/C3, C16/C4, C16/D2, C16/D3, C16/D4, C32/W1, C32/W2, C32/W3, C32/W4, C32/A1, C32/A2, C32/A3, C32/A3.5, C32/A4, C32/B1, C32/B2, C32/B3, C32/B4, C32/C1, C32/C2, C32/C3, C32/C4, C32/D2, C32/D3, C32/D4, C40/W1, C40/W2, C40/W3, C40/W4, C40/A1, C40/A2, C40/A3, C40/A3.5, C40/A4, C40/B1, C40/B2, C40/B3, C40/B4, C40/C1, C40/C2, C40/C3, C40/C4, C40/D2, C40/D3, C40/D4, P9806/W1, P9806/W2, P9806/W3, P9806/W4, P9806/A1, P9806/A2, P9806/A3, P9806/A3.5, P9806/A4, P9806/B1, P9806/B2, P9806/B3, P9806/B4, P9806/C1, P9806/C2, P9806/C3, P9806/C4, P9806/D2, P9806/D3, P9806/D4, P9808/W1, P9808/W2, P9808/W3, P9808/W4, P9808/A1, P9808/A2, P9808/A3, P9808/A3.5, P9808/A4, P9808/B1, P9808/B2, P9808/B3, P9808/B4, P9808/C1, P9808/C2, P9808/C3, P9808/C4, P9808/D2, P9808/D3, P9808/D4, P9810/W1, P9810/W2, P9810/W3, P9810/W4, P9810/A1, P9810/A2, P9810/A3, P9810/A3.5, P9810/A4, P9810/B1, P9810/B2, P9810/B3, P9810/B4, P9810/C1, P9810/C2, P9810/C3, P9810/C4, P9810/D2, P9810/D3, P9810/D4, P9812/W1, P9812/W2, P9812/W3, P9812/W4, P9812/A1, P9812/A2, P9812/A3, P9812/A3.5, P9812/A4, P9812/B1, P9812/B2, P9812/B3, P9812/B4, P9812/C1, P9812/C2, P9812/C3, P9812/C4, P9812/D2, P9812/D3, P9812/D4, P9814/W1, P9814/W2, P9814/W3, P9814/W4, P9814/A1, P9814/A2, P9814/A3, P9814/A3.5, P9814/A4, P9814/B1, P9814/B2, P9814/B3, P9814/B4, P9814/C1, P9814/C2, P9814/C3, P9814/C4, P9814/D2, P9814/D3, P9814/D4, P9816/W1, P9816/W2, P9816/W3, P9816/W4, P9816/A1, P9816/A2, P9816/A3, P9816/A3.5, P9816/A4, P9816/B1, P9816/B2, P9816/B3, P9816/B4, P9816/C1, P9816/C2, P9816/C3, P9816/C4, P9816/D2, P9816/D3, P9816/D4, P9818/W1, P9818/W2, P9818/W3, P9818/W4, P9818/A1, P9818/A2, P9818/A3, P9818/A3.5, P9818/A4, P9818/B1, P9818/B2, P9818/B3, P9818/B4, P9818/C1, P9818/C2, P9818/C3, P9818/C4, P9818/D2, P9818/D3, P9818/D4, P9820/W1, P9820/W2, P9820/W3, P9820/W4, P9820/A1, P9820/A2, P9820/A3, P9820/A3.5, P9820/A4, P9820/B1, P9820/B2, P9820/B3, P9820/B4, P9820/C1, P9820/C2, P9820/C3, P9820/C4, P9820/D2, P9820/D3, P9820/D4, A7106/W1, A7106/W2, A7106/W3, A7106/W4, A7106/A1, A7106/A2, A7106/A3, A7106/A3.5, A7106/A4, A7106/B1, A7106/B2, A7106/B3, A7106/B4, A7106/C1, A7106/C2, A7106/C3, A7106/C4, A7106/D2, A7106/D3, A7106/D4, A7108/W1, A7108/W2, A7108/W3, A7108/W4, A7108/A1, A7108/A2, A7108/A3, A7108/A3.5, A7108/A4, A7108/B1, A7108/B2, A7108/B3, A7108/B4, A7108/C1, A7108/C2, A7108/C3, A7108/C4, A7108/D2, A7108/D3, A7108/D4, A7110/W1, A7110/W2, A7110/W3, A7110/W4, A7110/A1, A7110/A2, A7110/A3, A7110/A3.5, A7110/A4, A7110/B1, A7110/B2, A7110/B3, A7110/B4, A7110/C1, A7110/C2, A7110/C3, A7110/C4, A7110/D2, A7110/D3, A7110/D4, A7112/W1, A7112/W2, A7112/W3, A7112/W4, A7112/A1, A7112/A2, A7112/A3, A7112/A3.5, A7112/A4, A7112/B1, A7112/B2, A7112/B3, A7112/B4, A7112/C1, A7112/C2, A7112/C3, A7112/C4, A7112/D2, A7112/D3, A7112/D4, A7114/W1, A7114/W2, A7114/W3, A7114/W4, A7114/A1, A7114/A2, A7114/A3, A7114/A3.5, A7114/A4, A7114/B1, A7114/B2, A7114/B3, A7114/B4, A7114/C1, A7114/C2, A7114/C3, A7114/C4, A7114/D2, A7114/D3, A7114/D4, A7116/W1, A7116/W2, A7116/W3, A7116/W4, A7116/A1, A7116/A2, A7116/A3, A7116/A3.5, A7116/A4, A7116/B1, A7116/B2, A7116/B3, A7116/B4, A7116/C1, A7116/C2, A7116/C3, A7116/C4, A7116/D2, A7116/D3, A7116/D4, A7118/W1, A7118/W2, A7118/W3, A7118/W4, A7118/A1, A7118/A2, A7118/A3, A7118/A3.5, A7118/A4, A7118/B1, A7118/B2,

A7118/B3, A7118/B4, A7118/C1, A7118/C2, A7118/C3, A7118/C4, A7118/D2, A7118/D3, A7118/D4, A7120/W1, A7120/W2, A7120/W3, A7120/W4, A7120/A1, A7120/A2, A7120/A3, A7120/A3.5, A7120/A4, A7120/B1, A7120/B2, A7120/B3, A7120/B4, A7120/C1, A7120/C2, A7120/C3, A7120/C4, A7120/D2, A7120/D3, A7120/D4, Z9506/W1, Z9506/W2, Z9506/W3, Z9506/W4, Z9506/A1, Z9506/A2, Z9506/A3, Z9506/A3.5, Z9506/A4, Z9506/B1, Z9506/B2, Z9506/B3, Z9506/B4, Z9506/C1, Z9506/C2, Z9506/C3, Z9506/C4, Z9506/D2, Z9506/D3, Z9506/D4, Z9508/W1, Z9508/W2, Z9508/W3, Z9508/W4, Z9508/A1, Z9508/A2, Z9508/A3, Z9508/A3.5, Z9508/A4, Z9508/B1, Z9508/B2, Z9508/B3, Z9508/B4, Z9508/C1, Z9508/C2, Z9508/C3, Z9508/C4, Z9508/D2, Z9508/D3, Z9508/D4, Z9510/W1, Z9510/W2, Z9510/W3, Z9510/W4, Z9510/A1, Z9510/A2, Z9510/A3, Z9510/A3.5, Z9510/A4, Z9510/B1, Z9510/B2, Z9510/B3, Z9510/B4, Z9510/C1, Z9510/C2, Z9510/C3, Z9510/C4, Z9510/D2, Z9510/D3, Z9510/D4, Z9512/W1, Z9512/W2, Z9512/W3, Z9512/W4, Z9512/A1, Z9512/A2, Z9512/A3, Z9512/A3.5, Z9512/A4, Z9512/B1, Z9512/B2, Z9512/B3, Z9512/B4, Z9512/C1, Z9512/C2, Z9512/C3, Z9512/C4, Z9512/D2, Z9512/D3, Z9512/D4, Z9514/W1, Z9514/W2, Z9514/W3, Z9514/W4, Z9514/A1, Z9514/A2, Z9514/A3, Z9514/A3.5, Z9514/A4, Z9514/B1, Z9514/B2, Z9514/B3, Z9514/B4, Z9514/C1, Z9514/C2, Z9514/C3, Z9514/C4, Z9514/D2, Z9514/D3, Z9514/D4, Z9516/W1, Z9516/W2, Z9516/W3, Z9516/W4, Z9516/A1, Z9516/A2, Z9516/A3, Z9516/A3.5, Z9516/A4, Z9516/B1, Z9516/B2, Z9516/B3, Z9516/B4, Z9516/C1, Z9516/C2, Z9516/C3, Z9516/C4, Z9516/D2, Z9516/D3, Z9516/D4, Z9518/W1, Z9518/W2, Z9518/W3, Z9518/W4, Z9518/A1, Z9518/A2, Z9518/A3, Z9518/A3.5, Z9518/A4, Z9518/B1, Z9518/B2, Z9518/B3, Z9518/B4, Z9518/C1, Z9518/C2, Z9518/C3, Z9518/C4, Z9518/D2, Z9518/D3, Z9518/D4, Z9520/W1, Z9520/W2, Z9520/W3, Z9520/W4, Z9520/A1, Z9520/A2, Z9520/A3, Z9520/A3.5, Z9520/A4, Z9520/B1, Z9520/B2, Z9520/B3, Z9520/B4, Z9520/C1, Z9520/C2, Z9520/C3, Z9520/C4, Z9520/D2, Z9520/D3, Z9520/D4

2. Amber Mill Meso: C14/W1(S), C14/W2(S), C14/W3(S), C14/W4(S), C14/A1(S), C14/A2(S), C14/A3(S), C14/A3.5(S), C14/A4(S), C14/B1(S), C14/B2(S), C14/B3(S), C14/B4(S), C14/C1(S), C14/C2(S), C14/C3(S), C14/C4(S), C14/D2(S), C14/D3(S), C14/D4(S), C14/W1(L), C14/W2(L), C14/W3(L), C14/W4(L), C14/A1(L), C14/A2(L), C14/A3(L), C14/A3.5(L), C14/A4(L), C14/B1(L), C14/B2(L), C14/B3(L), C14/B4(L), C14/C1(L), C14/C2(L), C14/C3(L), C14/C4(L), C14/D2(L), C14/D3(L), C14/D4(L), C16/W1(S), C16/W2(S), C16/W3(S), C16/W4(S), C16/A1(S), C16/A2(S), C16/A3(S), C16/A3.5(S), C16/A4(S), C16/B1(S), C16/B2(S), C16/B3(S), C16/B4(S), C16/C1(S), C16/C2(S), C16/C3(S), C16/C4(S), C16/D2(S), C16/D3(S), C16/D4(S), C16/W1(L), C16/W2(L), C16/W3(L), C16/W4(L), C16/A1(L), C16/A2(L), C16/A3(L), C16/A3.5(L), C16/A4(L), C16/B1(L), C16/B2(L), C16/B3(L), C16/B4(L), C16/C1(L), C16/C2(L), C16/C3(L), C16/C4(L), C16/D2(L), C16/D3(L), C16/D4(L)

3. Amber Mill Q: Amber Mill Q LT C14/W1 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/W2 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/W3 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/W4 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/A1 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/A2 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/A3 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/A3.5 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/A4 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/B1 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/B2 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/B3 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/B4 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/C1 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/C2 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/C3 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/C4 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/D2 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/D3 TB5.4L, Amber Mill Q LT C14/D4 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/W1 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/W2 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/W3 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/W4 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/A1 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/A2 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/A3 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/A3.5 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/A4 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/B1 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/B2 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/B3 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/B4 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/C1 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/C2 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/C3 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/C4 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/D2 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/D3 TB5.4L, Amber Mill Q HT C14/D4 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/W1 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/W2 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/W3 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/W4 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/A1 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/A2 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/A3 TB5.4L, Amber Mill Q MT C14/A3.5 TB5.4L, Amber Mill Q MT

1 Q HT C14/B2 T
0S, Amber Mill
C14/C3 TB3.0S,
er Mill O HT C


MO C14/3 TB3.5L

umber Mill Q LT
C3 TB4.1L, Amb
ill Q LT C12/D3

5L, Amber Mill
C12/B3 TB3.5L
ber Mill Q HT
TB3.5L, Amb

MT C16/A3.5 T

TB3.5L, Amber Mi
Mill Q LT C16/W4
TB3.5L, Amber Mi
Mill Q LT C16/A4

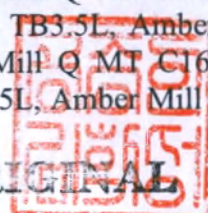

TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/3 TB3.5L, Amber Mill Q MO C16/4 TB3.5L, Amber Mill Q LT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q LT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q HT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/W4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A3.5 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/A4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/B4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C1 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/C4 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D2 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D3 TB4.8L, Amber Mill Q MT C16/D4 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/0 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/1 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/2 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/3 TB4.8L, Amber Mill Q MO C16/4 TB4.8L

4. Amber Mill Direct: Amber Mill Direct LT C14/W1, Amber Mill Direct LT C14/W2, Amber Mill Direct LT C14/W3, Amber Mill Direct LT C14/W4, Amber Mill Direct LT C14/A1, Amber Mill Direct LT C14/A2, Amber Mill Direct LT C14/A3, Amber Mill Direct LT C14/A3.5, Amber Mill Direct LT C14/A4, Amber Mill Direct LT C14/B1, Amber Mill Direct LT C14/B2, Amber Mill Direct LT C14/B3, Amber Mill Direct LT C14/B4, Amber Mill Direct LT C14/C1, Amber Mill Direct LT C14/C2, Amber Mill Direct LT C14/C3, Amber Mill Direct LT C14/C4, Amber Mill Direct LT C14/D2, Amber Mill Direct LT C14/D3, Amber Mill Direct LT C14/D4, Amber Mill Direct HT C14/W1, Amber Mill Direct HT C14/W2, Amber Mill Direct HT C14/W3, Amber Mill Direct HT C14/W4, Amber Mill Direct HT C14/A1, Amber Mill Direct HT C14/A2, Amber Mill Direct HT C14/A3, Amber Mill Direct HT C14/A3.5, Amber Mill Direct HT C14/A4, Amber Mill Direct HT C14/B1, Amber Mill Direct HT C14/B2, Amber Mill Direct HT C14/B3, Amber Mill Direct HT C14/B4, Amber Mill Direct HT C14/C1, Amber Mill Direct HT C14/C2, Amber Mill Direct HT C14/C3, Amber Mill Direct HT C14/C4, Amber Mill Direct HT C14/D2, Amber Mill Direct HT C14/D3, Amber Mill Direct HT C14/D4, Amber Mill Direct MT C14/W1, Amber Mill Direct MT C14/W2, Amber Mill Direct MT C14/W3, Amber Mill Direct MT C14/W4, Amber Mill Direct MT C14/A1, Amber Mill Direct MT C14/A2, Amber Mill Direct MT C14/A3, Amber Mill Direct MT C14/A3.5, Amber Mill Direct MT C14/A4, Amber Mill Direct MT C14/B1, Amber Mill Direct MT C14/B2, Amber Mill Direct MT C14/B3, Amber Mill Direct MT C14/B4, Amber Mill Direct MT C14/C1, Amber Mill Direct MT C14/C2, Amber Mill Direct MT C14/C3, Amber Mill Direct MT C14/C4, Amber Mill Direct MT C14/D2, Amber Mill Direct MT C14/D3, Amber Mill Direct MT C14/D4, Amber Mill Direct MO C14/0, Amber Mill Direct MO C14/1, Amber Mill Direct MO C14/2, Amber Mill Direct MO C14/3, Amber Mill Direct MO C14/4, Amber Mill Direct LT C12/W1, Amber Mill Direct LT C12/W2, Amber Mill Direct LT C12/W3, Amber Mill Direct LT C12/W4, Amber Mill Direct LT C12/A1, Amber Mill Direct LT C12/A2, Amber Mill Direct LT C12/A3, Amber Mill Direct LT C12/A3.5, Amber Mill Direct LT C12/A4, Amber Mill Direct LT C12/B1, Amber Mill Direct LT C12/B2, Amber Mill Direct LT C12/B3, Amber Mill Direct LT C12/B4, Amber Mill Direct LT C12/C1, Amber Mill Direct LT C12/C2, Amber Mill Direct LT C12/C3,

Amber Mill Direct LT C12/C4, Amber Mill Direct LT C12/D2, Amber Mill Direct LT C12/D3, Amber Mill Direct LT C12/D4, Amber Mill Direct HT C12/W1, Amber Mill Direct HT C12/W2, Amber Mill Direct HT C12/W3, Amber Mill Direct HT C12/W4, Amber Mill Direct HT C12/A1, Amber Mill Direct HT C12/A2, Amber Mill Direct HT C12/A3, Amber Mill Direct HT C12/A3.5, Amber Mill Direct HT C12/A4, Amber Mill Direct HT C12/B1, Amber Mill Direct HT C12/B2, Amber Mill Direct HT C12/B3, Amber Mill Direct HT C12/B4, Amber Mill Direct HT C12/C1, Amber Mill Direct HT C12/C2, Amber Mill Direct HT C12/C3, Amber Mill Direct HT C12/C4, Amber Mill Direct HT C12/D2, Amber Mill Direct HT C12/D3, Amber Mill Direct HT C12/D4, Amber Mill Direct MT C12/W1, Amber Mill Direct MT C12/W2, Amber Mill Direct MT C12/W3, Amber Mill Direct MT C12/W4, Amber Mill Direct MT C12/A1, Amber Mill Direct MT C12/A2, Amber Mill Direct MT C12/A3, Amber Mill Direct MT C12/A3.5, Amber Mill Direct MT C12/A4, Amber Mill Direct MT C12/B1, Amber Mill Direct MT C12/B2, Amber Mill Direct MT C12/B3, Amber Mill Direct MT C12/B4, Amber Mill Direct MT C12/C1, Amber Mill Direct MT C12/C2, Amber Mill Direct MT C12/C3, Amber Mill Direct MT C12/C4, Amber Mill Direct MT C12/D2, Amber Mill Direct MT C12/D3, Amber Mill Direct MT C12/D4, Amber Mill Direct MO C12/0, Amber Mill Direct MO C12/1, Amber Mill Direct MO C12/2, Amber Mill Direct MO C12/3, Amber Mill Direct MO C12/4, Amber Mill Direct LT C16/W1, Amber Mill Direct LT C16/W2, Amber Mill Direct LT C16/W3, Amber Mill Direct LT C16/W4, Amber Mill Direct LT C16/A1, Amber Mill Direct LT C16/A2, Amber Mill Direct LT C16/A3, Amber Mill Direct LT C16/A3.5, Amber Mill Direct LT C16/A4, Amber Mill Direct LT C16/B1, Amber Mill Direct LT C16/B2, Amber Mill Direct LT C16/B3, Amber Mill Direct LT C16/B4, Amber Mill Direct LT C16/C1, Amber Mill Direct LT C16/C2, Amber Mill Direct LT C16/C3, Amber Mill Direct LT C16/C4, Amber Mill Direct LT C16/D2, Amber Mill Direct LT C16/D3, Amber Mill Direct LT C16/D4, Amber Mill Direct HT C16/W1, Amber Mill Direct HT C16/W2, Amber Mill Direct HT C16/W3, Amber Mill Direct HT C16/W4, Amber Mill Direct HT C16/A1, Amber Mill Direct HT C16/A2, Amber Mill Direct HT C16/A3, Amber Mill Direct HT C16/A3.5, Amber Mill Direct HT C16/A4, Amber Mill Direct HT C16/B1, Amber Mill Direct HT C16/B2, Amber Mill Direct HT C16/B3, Amber Mill Direct HT C16/B4, Amber Mill Direct HT C16/C1, Amber Mill Direct HT C16/C2, Amber Mill Direct HT C16/C3, Amber Mill Direct HT C16/C4, Amber Mill Direct HT C16/D2, Amber Mill Direct HT C16/D3, Amber Mill Direct HT C16/D4, Amber Mill Direct MT C16/W1, Amber Mill Direct MT C16/W2, Amber Mill Direct MT C16/W3, Amber Mill Direct MT C16/W4, Amber Mill Direct MT C16/A1, Amber Mill Direct MT C16/A2, Amber Mill Direct MT C16/A3, Amber Mill Direct MT C16/A3.5, Amber Mill Direct MT C16/A4, Amber Mill Direct MT C16/B1, Amber Mill Direct MT C16/B2, Amber Mill Direct MT C16/B3, Amber Mill Direct MT C16/B4, Amber Mill Direct MT C16/C1, Amber Mill Direct MT C16/C2, Amber Mill Direct MT C16/C3, Amber Mill Direct MT C16/C4, Amber Mill Direct MT C16/D2, Amber Mill Direct MT C16/D3, Amber Mill Direct MT C16/D4, Amber Mill Direct MO C16/0, Amber Mill Direct MO C16/1, Amber Mill Direct MO C16/2, Amber Mill Direct MO C16/3, Amber Mill Direct MO C16/4

5. Amber Press: Amber Press LT R7/W1, Amber Press LT R7/W2, Amber Press LT R7/W3, Amber Press LT R7/W4, Amber Press LT R7/A1, Amber Press LT R7/A2, Amber Press LT R7/A3, Amber Press LT R7/A3.5, Amber Press LT R7/A4, Amber Press LT R7/B1, Amber Press LT R7/B2, Amber Press LT R7/B3, Amber Press LT R7/B4, Amber Press LT R7/C1, Amber Press LT R7/C2, Amber Press LT R7/C3, Amber Press LT R7/C4, Amber Press LT R7/D2, Amber Press LT R7/D3, Amber Press LT R7/D4, Amber Press HT R7/W0, Amber Press HT R7/W1, Amber Press HT R7/W2, Amber Press HT R7/W3, Amber Press HT R7/W4, Amber Press HT R7/A1, Amber Press HT R7/A2, Amber Press HT R7/A3, Amber Press HT R7/A3.5, Amber Press HT R7/A4, Amber Press HT R7/B1, Amber Press HT R7/B2, Amber Press HT R7/B3, Amber Press HT R7/B4, Amber Press HT R7/C1, Amber Press HT R7/C2, Amber Press HT R7/C3, Amber Press HT R7/C4, Amber Press HT R7/D2, Amber Press HT R7/D3, Amber Press HT R7/D4, Amber Press MO R7/0, Amber Press MO R7/1, Amber Press MO R7/2, Amber Press MO R7/3, Amber Press MO R7/4, Amber Press LT R10/W1, Amber Press LT R10/W2, Amber Press LT R10/W3, Amber Press LT R10/W4, Amber Press LT R10/A1, Amber Press LT R10/A2, Amber Press LT R10/A3, Amber Press LT R10/A3.5, Amber Press LT R10/A4, Amber Press LT R10/B1, Amber Press LT R10/B2, Amber Press LT R10/B3, Amber Press LT R10/B4,

Amber Press LT R10/C1, Amber Press LT R10/C2, Amber Press LT R10/C3, Amber Press LT R10/C4, Amber Press LT R10/D2, Amber Press LT R10/D3, Amber Press LT R10/D4, Amber Press HT R10/W0, Amber Press HT R10/W1, Amber Press HT R10/W2, Amber Press HT R10/W3, Amber Press HT R10/W4, Amber Press HT R10/A1, Amber Press HT R10/A2, Amber Press HT R10/A3, Amber Press HT R10/A3.5, Amber Press HT R10/A4, Amber Press HT R10/B1, Amber Press HT R10/B2, Amber Press HT R10/B3, Amber Press HT R10/B4, Amber Press HT R10/C1, Amber Press HT R10/C2, Amber Press HT R10/C3, Amber Press HT R10/C4, Amber Press HT R10/D2, Amber Press HT R10/D3, Amber Press HT R10/D4, Amber Press MO R10/0, Amber Press MO R10/1, Amber Press MO R10/2, Amber Press MO R10/3, Amber Press MO R10/4, Amber Press LT R15/W1, Amber Press LT R15/W2, Amber Press LT R15/W3, Amber Press LT R15/W4, Amber Press LT R15/A1, Amber Press LT R15/A2, Amber Press LT R15/A3, Amber Press LT R15/A3.5, Amber Press LT R15/A4, Amber Press LT R15/B1, Amber Press LT R15/B2, Amber Press LT R15/B3, Amber Press LT R15/B4, Amber Press LT R15/C1, Amber Press LT R15/C2, Amber Press LT R15/C3, Amber Press LT R15/C4, Amber Press LT R15/D2, Amber Press LT R15/D3, Amber Press LT R15/D4, Amber Press HT R15/W0, Amber Press HT R15/W1, Amber Press HT R15/W2, Amber Press HT R15/W3, Amber Press HT R15/W4, Amber Press HT R15/A1, Amber Press HT R15/A2, Amber Press HT R15/A3, Amber Press HT R15/A3.5, Amber Press HT R15/A4, Amber Press HT R15/B1, Amber Press HT R15/B2, Amber Press HT R15/B3, Amber Press HT R15/B4, Amber Press HT R15/C1, Amber Press HT R15/C2, Amber Press HT R15/C3, Amber Press HT R15/C4, Amber Press HT R15/D2, Amber Press HT R15/D3, Amber Press HT R15/D4, Amber Press MO R15/0, Amber Press MO R15/1, Amber Press MO R15/2, Amber Press MO R15/3, Amber Press MO R15/4, Amber Press LT R20/W1, Amber Press LT R20/W2, Amber Press LT R20/W3, Amber Press LT R20/W4, Amber Press LT R20/A1, Amber Press LT R20/A2, Amber Press LT R20/A3, Amber Press LT R20/A3.5, Amber Press LT R20/A4, Amber Press LT R20/B1, Amber Press LT R20/B2, Amber Press LT R20/B3, Amber Press LT R20/B4, Amber Press LT R20/C1, Amber Press LT R20/C2, Amber Press LT R20/C3, Amber Press LT R20/C4, Amber Press LT R20/D2, Amber Press LT R20/D3, Amber Press LT R20/D4, Amber Press HT R20/W0, Amber Press HT R20/W1, Amber Press HT R20/W2, Amber Press HT R20/W3, Amber Press HT R20/W4, Amber Press HT R20/A1, Amber Press HT R20/A2, Amber Press HT R20/A3, Amber Press HT R20/A3.5, Amber Press HT R20/A4, Amber Press HT R20/B1, Amber Press HT R20/B2, Amber Press HT R20/B3, Amber Press HT R20/B4, Amber Press HT R20/C1, Amber Press HT R20/C2, Amber Press HT R20/C3, Amber Press HT R20/C4, Amber Press HT R20/D2, Amber Press HT R20/D3, Amber Press HT R20/D4, Amber Press MO R20/0, Amber Press MO R20/1, Amber Press MO R20/2, Amber Press MO R20/3, Amber Press MO R20/4

6. Amber Press Master: Amber Press Master MT R10/W0.5, Amber Press Master MT R10/A0.5, Amber Press Master MT R10/A1.5, Amber Press Master MT R10/A2.5, Amber Press Master HT+ R10/W0.5, Amber Press Master HT+ R10/A0.5, Amber Press Master HT+ R10/A1.5, Amber Press Master HT+ R10/A2.5, Amber Press Master HT+ R10/A3.5, Amber Press Master LO R10/0, Amber Press Master LO R10/1, Amber Press Master LO R10/2, Amber Press Master LO R10/3, Amber Press Master MT R20/W0.5, Amber Press Master MT R20/A0.5, Amber Press Master MT R20/A1.5, Amber Press Master MT R20/A2.5, Amber Press Master HT+ R20/W0.5, Amber Press Master HT+ R20/A0.5, Amber Press Master HT+ R20/A1.5, Amber Press Master HT+ R20/A2.5, Amber Press Master HT+ R20/A3.5, Amber Press Master LO R20/0, Amber Press Master LO R20/1, Amber Press Master LO R20/2, Amber Press Master LO R20/3

7. Amber LiSi-POZ: Amber LiSi-POZ LT R7/W1, Amber LiSi-POZ LT R7/W2, Amber LiSi-POZ LT R7/W3, Amber LiSi-POZ LT R7/W4, Amber LiSi-POZ LT R7/A1, Amber LiSi-POZ LT R7/A2, Amber LiSi-POZ LT R7/A3, Amber LiSi-POZ LT R7/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R7/A4, Amber LiSi-POZ LT R7/B1, Amber LiSi-POZ LT R7/B2, Amber LiSi-POZ LT R7/B3, Amber LiSi-POZ LT R7/B4, Amber LiSi-POZ LT R7/C1, Amber LiSi-POZ LT R7/C2, Amber LiSi-POZ LT R7/C3, Amber LiSi-POZ LT R7/C4, Amber LiSi-POZ LT R7/D2, Amber LiSi-POZ LT R7/D3, Amber LiSi-POZ LT R7/D4, Amber LiSi-POZ HT R7/W0, Amber LiSi-POZ HT R7/W1, Amber LiSi-POZ HT R7/W2, Amber LiSi-POZ HT R7/W3, Amber LiSi-POZ HT

R7/W4, Amber LiSi-POZ HT R7/A1, Amber LiSi-POZ HT R7/A2, Amber LiSi-POZ HT R7/A3, Amber LiSi-POZ HT R7/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R7/A4, Amber LiSi-POZ HT R7/B1, Amber LiSi-POZ HT R7/B2, Amber LiSi-POZ HT R7/B3, Amber LiSi-POZ HT R7/B4, Amber LiSi-POZ HT R7/C1, Amber LiSi-POZ HT R7/C2, Amber LiSi-POZ HT R7/C3, Amber LiSi-POZ HT R7/C4, Amber LiSi-POZ HT R7/D2, Amber LiSi-POZ HT R7/D3, Amber LiSi-POZ HT R7/D4, Amber LiSi-POZ MO R7/0, Amber LiSi-POZ MO R7/1, Amber LiSi-POZ MO R7/2, Amber LiSi-POZ MO R7/3, Amber LiSi-POZ MO R7/4, Amber LiSi-POZ LT R10/W1, Amber LiSi-POZ LT R10/W2, Amber LiSi-POZ LT R10/W3, Amber LiSi-POZ LT R10/W4, Amber LiSi-POZ LT R10/A1, Amber LiSi-POZ LT R10/A2, Amber LiSi-POZ LT R10/A3, Amber LiSi-POZ LT R10/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R10/A4, Amber LiSi-POZ LT R10/B1, Amber LiSi-POZ LT R10/B2, Amber LiSi-POZ LT R10/B3, Amber LiSi-POZ LT R10/B4, Amber LiSi-POZ LT R10/C1, Amber LiSi-POZ LT R10/C2, Amber LiSi-POZ LT R10/C3, Amber LiSi-POZ LT R10/C4, Amber LiSi-POZ LT R10/D2, Amber LiSi-POZ LT R10/D3, Amber LiSi-POZ LT R10/D4, Amber LiSi-POZ HT R10/W0, Amber LiSi-POZ HT R10/W1, Amber LiSi-POZ HT R10/W2, Amber LiSi-POZ HT R10/W3, Amber LiSi-POZ HT R10/W4, Amber LiSi-POZ HT R10/A1, Amber LiSi-POZ HT R10/A2, Amber LiSi-POZ HT R10/A3, Amber LiSi-POZ HT R10/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R10/A4, Amber LiSi-POZ HT R10/B1, Amber LiSi-POZ HT R10/B2, Amber LiSi-POZ HT R10/B3, Amber LiSi-POZ HT R10/B4, Amber LiSi-POZ HT R10/C1, Amber LiSi-POZ HT R10/C2, Amber LiSi-POZ HT R10/C3, Amber LiSi-POZ HT R10/C4, Amber LiSi-POZ HT R10/D2, Amber LiSi-POZ HT R10/D3, Amber LiSi-POZ HT R10/D4, Amber LiSi-POZ MO R10/0, Amber LiSi-POZ MO R10/1, Amber LiSi-POZ MO R10/2, Amber LiSi-POZ MO R10/3, Amber LiSi-POZ MO R10/4, Amber LiSi-POZ LT R15/W1, Amber LiSi-POZ LT R15/W2, Amber LiSi-POZ LT R15/W3, Amber LiSi-POZ LT R15/W4, Amber LiSi-POZ LT R15/A1, Amber LiSi-POZ LT R15/A2, Amber LiSi-POZ LT R15/A3, Amber LiSi-POZ LT R15/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R15/A4, Amber LiSi-POZ LT R15/B1, Amber LiSi-POZ LT R15/B2, Amber LiSi-POZ LT R15/B3, Amber LiSi-POZ LT R15/B4, Amber LiSi-POZ LT R15/C1, Amber LiSi-POZ LT R15/C2, Amber LiSi-POZ LT R15/C3, Amber LiSi-POZ LT R15/C4, Amber LiSi-POZ LT R15/D2, Amber LiSi-POZ LT R15/D3, Amber LiSi-POZ LT R15/D4, Amber LiSi-POZ HT R15/W0, Amber LiSi-POZ HT R15/W1, Amber LiSi-POZ HT R15/W2, Amber LiSi-POZ HT R15/W3, Amber LiSi-POZ HT R15/W4, Amber LiSi-POZ HT R15/A1, Amber LiSi-POZ HT R15/A2, Amber LiSi-POZ HT R15/A3, Amber LiSi-POZ HT R15/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R15/A4, Amber LiSi-POZ HT R15/B1, Amber LiSi-POZ HT R15/B2, Amber LiSi-POZ HT R15/B3, Amber LiSi-POZ HT R15/B4, Amber LiSi-POZ HT R15/C1, Amber LiSi-POZ HT R15/C2, Amber LiSi-POZ HT R15/C3, Amber LiSi-POZ HT R15/C4, Amber LiSi-POZ HT R15/D2, Amber LiSi-POZ HT R15/D3, Amber LiSi-POZ HT R15/D4, Amber LiSi-POZ MO R15/0, Amber LiSi-POZ MO R15/1, Amber LiSi-POZ MO R15/2, Amber LiSi-POZ MO R15/3, Amber LiSi-POZ MO R15/4, Amber LiSi-POZ LT R20/W1, Amber LiSi-POZ LT R20/W2, Amber LiSi-POZ LT R20/W3, Amber LiSi-POZ LT R20/W4, Amber LiSi-POZ LT R20/A1, Amber LiSi-POZ LT R20/A2, Amber LiSi-POZ LT R20/A3, Amber LiSi-POZ LT R20/A3.5, Amber LiSi-POZ LT R20/A4, Amber LiSi-POZ LT R20/B1, Amber LiSi-POZ LT R20/B2, Amber LiSi-POZ LT R20/B3, Amber LiSi-POZ LT R20/B4, Amber LiSi-POZ LT R20/C1, Amber LiSi-POZ LT R20/C2, Amber LiSi-POZ LT R20/C3, Amber LiSi-POZ LT R20/C4, Amber LiSi-POZ LT R20/D2, Amber LiSi-POZ LT R20/D3, Amber LiSi-POZ LT R20/D4, Amber LiSi-POZ HT R20/W0, Amber LiSi-POZ HT R20/W1, Amber LiSi-POZ HT R20/W2, Amber LiSi-POZ HT R20/W3, Amber LiSi-POZ HT R20/W4, Amber LiSi-POZ HT R20/A1, Amber LiSi-POZ HT R20/A2, Amber LiSi-POZ HT R20/A3, Amber LiSi-POZ HT R20/A3.5, Amber LiSi-POZ HT R20/A4, Amber LiSi-POZ HT R20/B1, Amber LiSi-POZ HT R20/B2, Amber LiSi-POZ HT R20/B3, Amber LiSi-POZ HT R20/B4, Amber LiSi-POZ HT R20/C1, Amber LiSi-POZ HT R20/C2, Amber LiSi-POZ HT R20/C3, Amber LiSi-POZ HT R20/C4, Amber LiSi-POZ HT R20/D2, Amber LiSi-POZ HT R20/D3, Amber LiSi-POZ HT R20/D4, Amber LiSi-POZ MO R20/0, Amber LiSi-POZ MO R20/1, Amber LiSi-POZ MO R20/2, Amber LiSi-POZ MO R20/3, Amber LiSi-POZ MO R20/4

등부 2021년 제 12641호

Registered No. 2021-12641

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 의료기기 사용에 대한 지침서-----

As a result of checking at my office, I
have found that the attached

Instruction for use for medical device

사본은 원본과 대조하여 그와 부합함을
인정한다.

----- copy
exactly corresponds with the original

2021년 12월 10일

This is hereby attested on this

이 사무소에서 위 인증한다.

10th day of Dec. 2021 at this office.

공증사무소 명칭

공증인 김학성 사무소

Name of the office

KIM HAK SUNG NOTARY OFFICE

소 속 서울중앙지방검찰청

Belong to Seoul Central

소재지표시

District Prosecutor's Office

서울특별시 중구 퇴계로 131,

Address of the office

202호(신일빌딩)

#202, 131, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea

공증인

김 학 성

Signature of the Notary Public

KIM HAK SUNG

본 사무소는 법률 제9416호에 의거하여
2018년 07월 02일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
2, Jul. 2018 Under Law No.9416.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea



This public document

2. has been signed by KIM HAK SUNG

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of KIM HAK SUNG NOTARY OFFICE

Certified

To verify the Apostille, please refer to the website below.
<https://www.apostille.go.kr>

5. at Seoul 6. the 10/12/2021

7. by The Ministry of Justice

8. No. XXA2021K9F620T

9. Seal/stamp

10. Signature

Song Hee

Song Hee



[Перевод с английского и корейского языков на русский язык]

[Герб Республики Корея]

[Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

№ 202, 131, Тоегё-ро, Чун-гу, Сеул, Корея
[Форма № 41]

**«НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
КИМ ХАК СОНГ»**

(Тел.) 02-779-5581~2
(Факс) 02-779-5584

Регистрационный номер: 2021 – 12641

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**«НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА КИМ ХАК СУНА»
(KIM HAK SUNG NOTARY OFFICE)**

№ 202, 131, Тоегё-ро, Чун-гу, Сеул, Корея
(#202, 131, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea)

[Тисненая печать: «НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА КИМ ХАК СОНГ»]

210 мм х 297 мм
(Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²

На оборотах: [Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

«УТВЕРЖДАЮ»

«ХАСС Корпорэйшн» (HASS Corporation)

Президент и главный исполнительный директор

(должность)

Ёнсу Ким (Yongsu Kim)

(имя)

(подпись)

«8» декабря 2021 г.

«день» месяц (цифрами)

М.П.

[Печать: «ХАСС Корпорэйшн»]

[Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

[Штамп: «ХАСС Корпорэйшн»]

77-14 КВАХАКДАНДЖИ-РО, КАННЫН-СИ, КАНВОНДО, КОРЕЯ
(77-14 GWANAKDANJI-RO, GANGNEUNG-SI, GANGWON-DO, KOREA)

/подпись/

Ёнсу Ким/Президент и главный исполнительный директор]

Инструкция по применению на медицинское изделие

Материалы стоматологические реставрационные Amber

производства

«ХАСС Корпорэйшн», Корея

[Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

[Штамп: СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ]

2021 г.

[Текст документа на русском языке]

[Печать: «ХАСС Корпорэйшн»]

[Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

[Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

[Штамп: СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ]

Регистрационный номер: 2021 – 12641

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

В результате проведенной в моем офисе проверки
я удостоверился, что прилагаемая копия
инструкции по применению на медицинское изделие
полностью соответствует оригиналу.

Настоящим засвидетельствовано 10 декабря 2021 г. в указанном офисе.

Название офиса

«НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА КИМ ХАК СОНГ»

Относится к Прокуратуре центрального округа Сеула

Адрес офиса

№ 202, 131, Тоегё-ро, Чун-гу, Сеул, Корея

/подпись/

Подпись нотариуса

КИМ ХАК СОНГ (KIM HAK SUNG)

[Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

[Печать: «Нотариальная контора Ким Хак Сонг», нотариус Ким Хак Сонг]

Настоящая нотариальная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея
предоставлять нотариальные услуги со 2 июля 2018 г. в соответствии с законом № 9416.

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Республика Корея [QR-код]
Настоящий официальный документ
2. подписан КИМ ХАК СОНГОМ,
3. выступающим в качестве нотариуса,
4. скреплен печатью/штампом «НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ КИМ ХАК СОНГ».

Удостоверено

Для верификации апостиля перейдите по ссылке ниже:

<https://www.apostille.go.kr>

5. в Сеуле 6. 10.12.2021 г.
7. Министерством юстиции
8. за № ХХА2021К9F62ОТ
9. Печать/штамп:

10. Подпись:

/подпись/

Сон Хи (Song Hee)

[Гербовая печать: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ * РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ]

Перевод данного текста выполнен переводчиком Сироткиной Марией Олеговной





Российская Федерация

Город Москва

Двадцать четвертого декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую истинность подписи переводчика Сироткиной Марии Олеговны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09 – н/77 – 2021 – 108-5169

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Г.Б. Акимов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 78 лист(-а,-ов).

Нотариус:

