



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИСТ-ФАРМ»**

---

Приморский край, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, 120-Б

ИНН 2511087220 КПП 251101001


Тел.: 8 (4234) 33-69-88

e-mail: secret@eastpharm.ru

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ**

**Наименование:** медицинское изделие «Маска медицинская  
одноразовая, трехслойная из нетканого материала по ТУ 32.50.50-  
001-13738339-2020» (далее маска).

## Общий вид маски

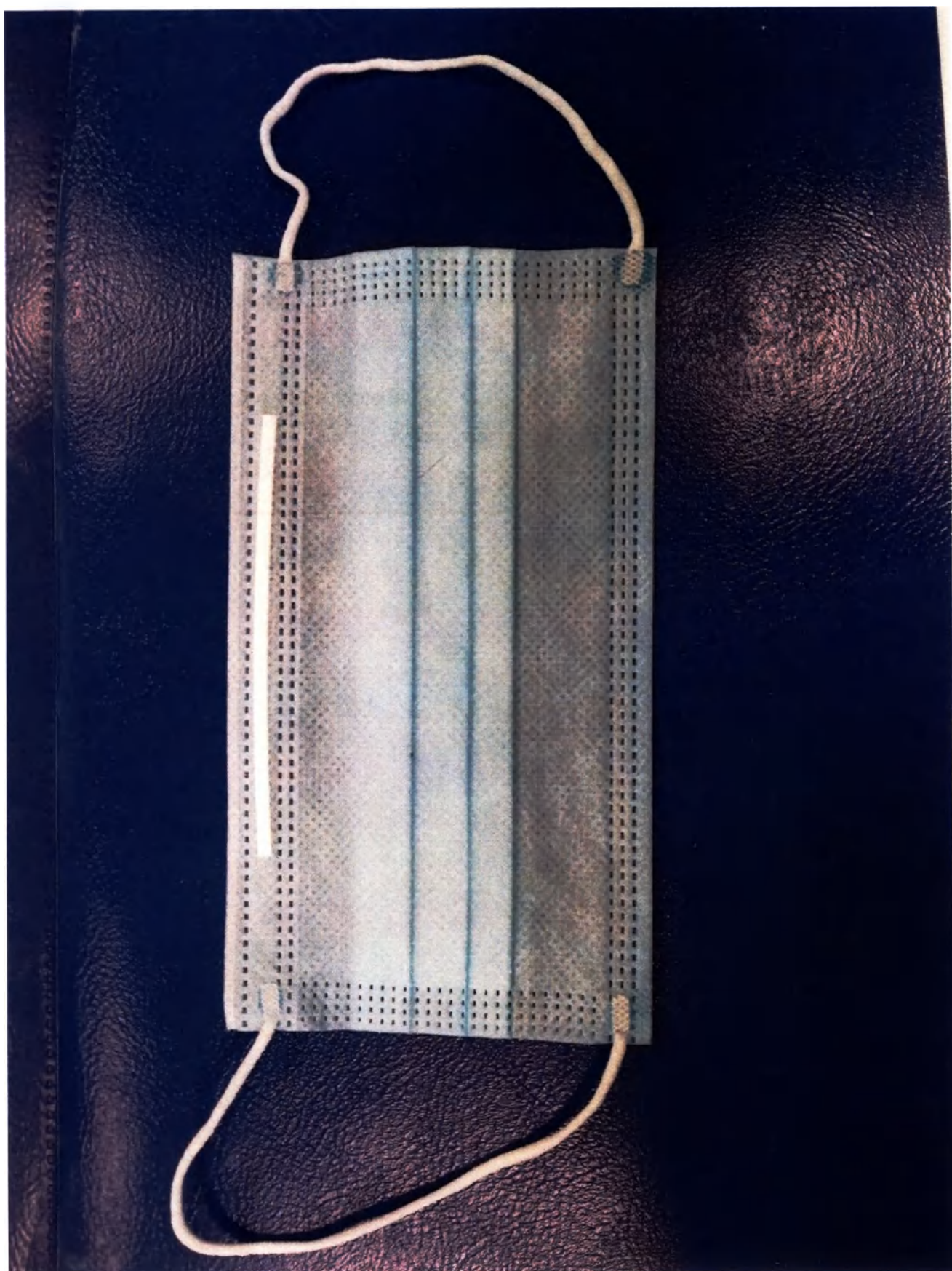



**ООО «ИСТ-ФАРМ»**

692525, Россия, Приморский край, г. Уссурийск,  
ул. Волочаевская, 120-Б. Тел./факс: (4234) 33-81-27, 33-69-88

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ  
ОДНОРАЗОВАЯ, ТРЕХСЛОЙНАЯ ИЗ  
НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА**  
по ТУ 32.50.50-001-13738339-2020

ГОСТ Р 58396-2019

Тип I по ГОСТ Р 58396-2019

Сырьевой состав: 100 % полипропилен.

Не стерильно.

Для однократного применения!

Условия хранения:

*температура - не выше 40°C,*

*влажность - не более 80 %.*

Срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Количество: XX штук.

Номер партии: XXXXXX

Дата изготовления: XXXXXX

Правила использования масок:

1. Достаньте маску из упаковки и раскройте ее.
2. Расположите одноразовую медицинскую маску вертикально перед лицом, удерживая ее за резинки.
3. Заведя резинку за уши, наденьте одноразовую медицинскую маску, чтобы нос и рот оказались закрытыми маской.
4. Слегка продавите пальцами носовой фиксатор слева и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.
5. После использования снимите маску и утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Регистрационный номер

Штрих-код

Пример упаковки. Маска в полиэтиленовой потребительской упаковке  
(негерметичные пакеты из пленки полиэтиленовой с липким краем),  
сторона 1 (вкладыш с маркировкой)



**Правила использования масок:**

1. Достаньте маску из упаковки и раскройте ее.
2. Расположите одноразовую медицинскую маску вертикально перед лицом. Удерживая ее за резинки.
3. Заверьте резинку за уши, наденьте одноразовую медицинскую маску, чтобы нос и рот оказались закрытыми маской.
4. Слегка продавите пальцами носовой фиксатор слева и справа от носа для более удобного расположения маски на лице.
5. После использования снимите маску и утилизируйте согласно действующим предписаниям.

РЕН.202011817 от 10.09.2020

4 680034 160784

**ООО «ИСТ-ФАРМ»**  
652525, Ростов, Промысловый тракт, 13  
ул. Волочаевская, 120А-5. Тел: 8920 33-61-57, 33-68-88

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ  
ОДНОРАЗОВАЯ, ТРЕХСЛОЙНАЯ ИЗ  
ТЕКСТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА**  
по ТУ 32.50.50-001-13788339-2020

ГОСТ Р 58396-2019  
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019

Сырьевой состав: 100 % полипропилен.  
Не стерильно.  
Для однократного применения!

Условия хранения:  
температура - не выше 40 °С;  
влажность - не более 80 %.

Срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Количество: 30 штук. 140421  
Номер партии: 200421  
Дата изготовления:

Пример упаковки. Маска в полиэтиленовой потребительской упаковке  
(негерметичные пакеты из пленки полиэтиленовой с липким краем),  
сторона 2 (инструкция по применению)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ,**  
**ТРЕХСЛОЙНАЯ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА**  
*по ТУ 32.50.50-001-13738339-2020*

Соответствует требованиям ГОСТ Р 58396-2019  
«Маски медицинские. Требования и методы  
испытаний».

Тип I по ГОСТ Р 58396-2019.

Не стерильно.

Дата введения: 24.08.2020 г.

**Назначение:**

В качестве барьерного средства для ограничения  
передачи инфекционных агентов, в том числе при  
возникновении угрозы распространения инфекций,  
передающихся воздушно-капельным путем.

**Потенциальный потребитель:** сотрудники в  
медицинских и лечебно-профилактических  
учреждениях, пациенты и другие лица для снижения  
риска распространения инфекций, передающихся  
воздушно-капельным путем.

**Функциональные характеристики:**

Маска способствует сокращению выхода  
инфекционных агентов из носовой и ротовой  
полостей бессимптомного носителя или человека с  
клиническими симптомами.

**Противопоказания:** не выявлены в рамках  
установленного производителем назначения.

**Побочные эффекты:** возможна индивидуальная  
аллергическая реакция на материалы маски.

**Технические характеристики:**

Маска изготавливается из трех типов нетканого  
материала, соединенных между собой в различной  
последовательности в три слоя.

Маска изготавливается из следующих типов  
нетканых материалов:

- Трехслойный нетканый материал  
(спанбонд/мельтблэнд/спанбонд),
- Двухслойный нетканый материал  
(спанбонд/спанбонд),
- Однослойный нетканый материал  
(мельтблэнд).

Выпускается универсального размера 17,5 (±0,5) см  
х 9,5 (±0,5) см.

Изделие не содержит лекарственных средств,  
материалы животного или человеческого  
происхождения.

**Способ применения:**

1. Достаньте маску из упаковки и раскройте её.
2. Расположите одноразовую медицинскую маску  
вертикально перед лицом, удерживая ее за резинки.






# МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ

трехслойная из нетканого материала  
по ТУ 32.50.50-001-13738339-2020


XX штук

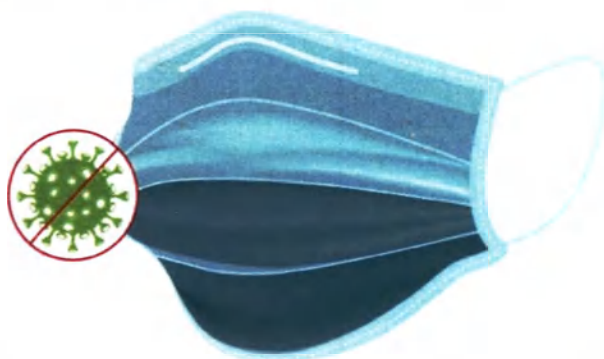

# МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ

трехслойная из нетканого материала  
по ТУ 32.50.50-001-13738339-2020

XX штук

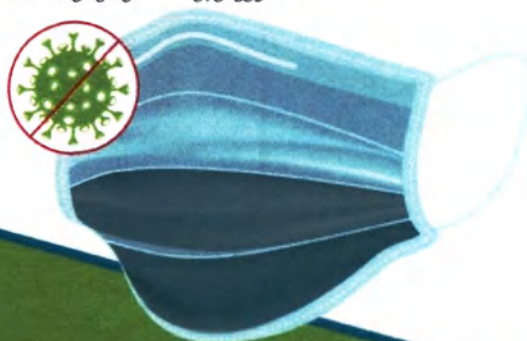

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ  
трехслойная из нетканого материала  
по ТУ 32.50.50-001-13738339-2020

ГОСТ Р 58396-2019

Тип I по ГОСТ Р 58396-2019

СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ: 100 % полипропилен

НЕ СТЕРИЛЬНО

КОЛИЧЕСТВО В ПАКЕТЕ: XX штук

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

температура — не выше 40°C,

влажность — не более 80 %

СРОК ХРАНЕНИЯ:

3 года с даты изготовления

Номер партии: XXXXXX

Дата изготовления: XXXXXX

Регистрационный номер

Штрих-код



Производитель:  
ООО «ИСТ-ФАРМ»  
692525, Россия, Приморский край,  
г. Уссурийск, ул. Вольчанская, д. 120-Б




# МАСКА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ


трехслойная из нетканого материала

по ТУ 32.50.50-001-13738339-2020

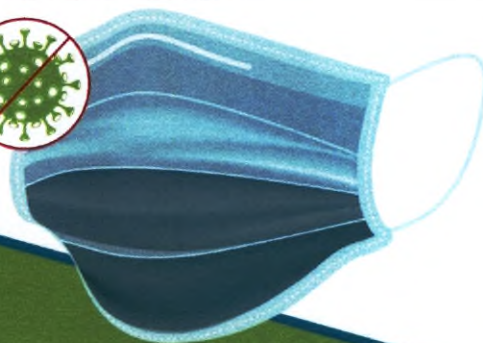

XX штук

Пример упаковки. Маска в полиэтиленовой потребительской упаковке  
(негерметичные пакеты из пленки полиэтиленовой с липким краем),  
в пачке картонной.

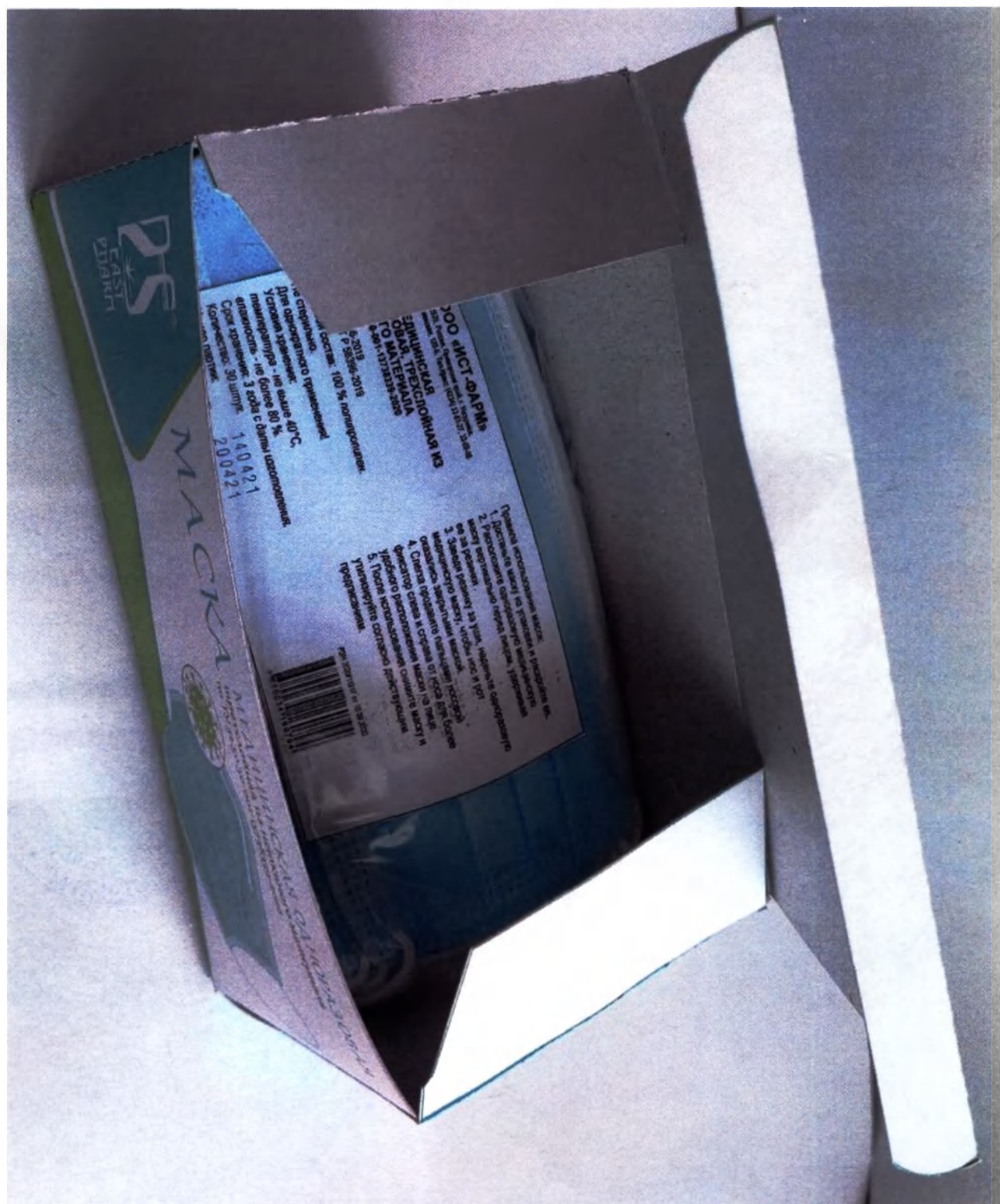

Генеральный директор  
ООО «ИСТ-ФАРМ»



Скачко Ю.В.

Прошито и  
пронумеровано и  
скреплено печатью  
11 листа (ов)

Генеральный  
директор  
ООО «Ист-Фарм»  
Скачко Ю. В.

«06» 03 2022

