

AZ Ltd.



ООО «А Зет»

Building 4, viad. «Триколор», mic.dist. Vostryakovo,
Domodedovo, Moscow Region, Russia, 142072
Phone: +7(495) 926-50-50
Fax: +7(495) 926-50-50
www.azcompany.ru
e-mail: office@azcompany.ru

Россия, 142072, Московская область, г. Домодедово,
мкр. Востряково, влад. «Триколор», стр.4
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-50-50
www.azcompany.ru
e-mail: office@azcompany.ru

В Федеральную службу
по надзору в сфере здравоохранения
109074, Москва,
Славянская пл., д. 4, стр. 1

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «здравсити®»,
«Клинса medical®», «Dr. Safe®», в вариантах исполнения**


производства

**JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.
«ДЖОЙТЕХ ХЕЛСКЕА КО., ЛТД.»**


Термометр цифровой DMT-101 (фото в упаковке, лицо)



Термометр цифровой DMT-101 (фото в упаковке, оборот)

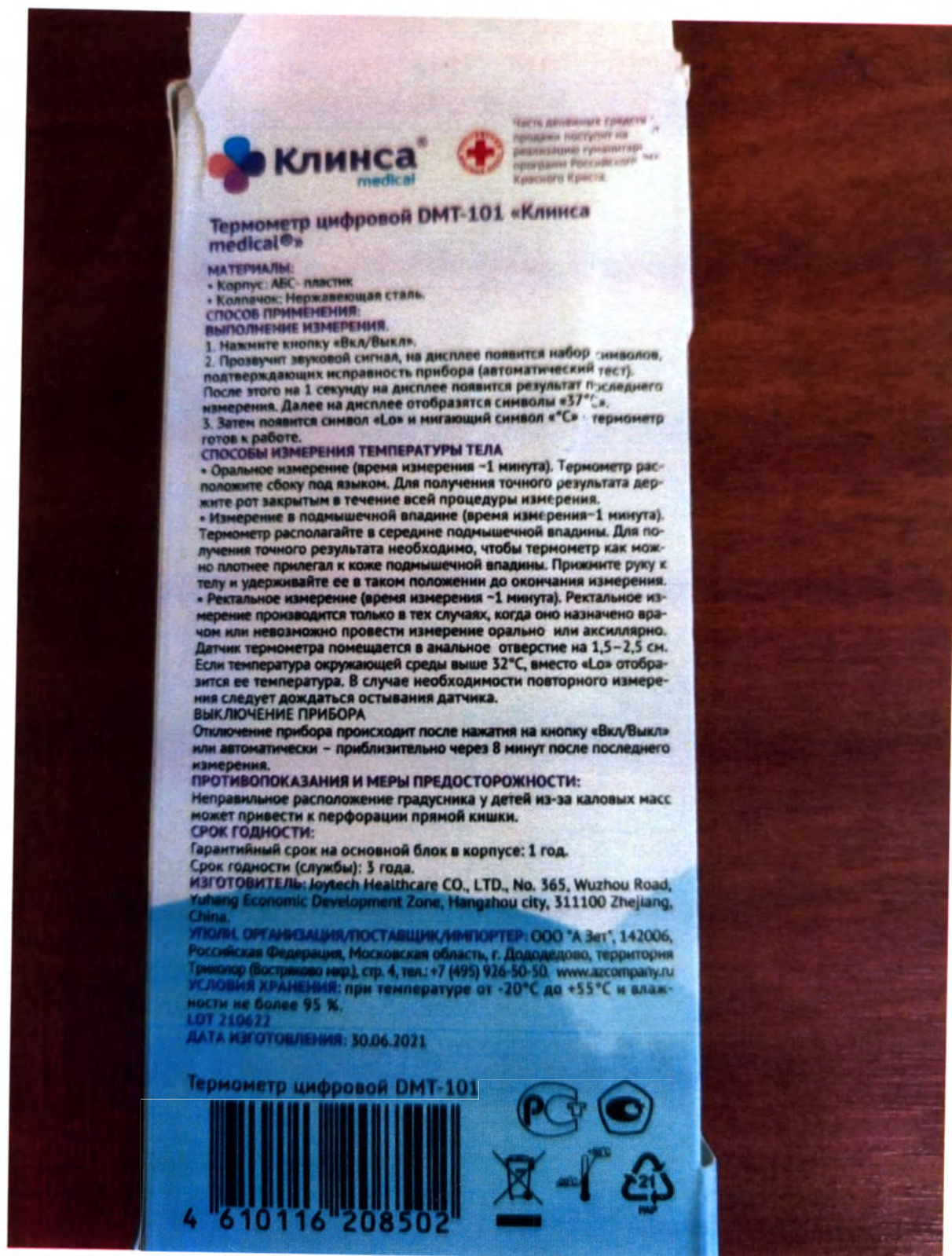

Термометр цифровой DMT-101 (фото без упаковки)

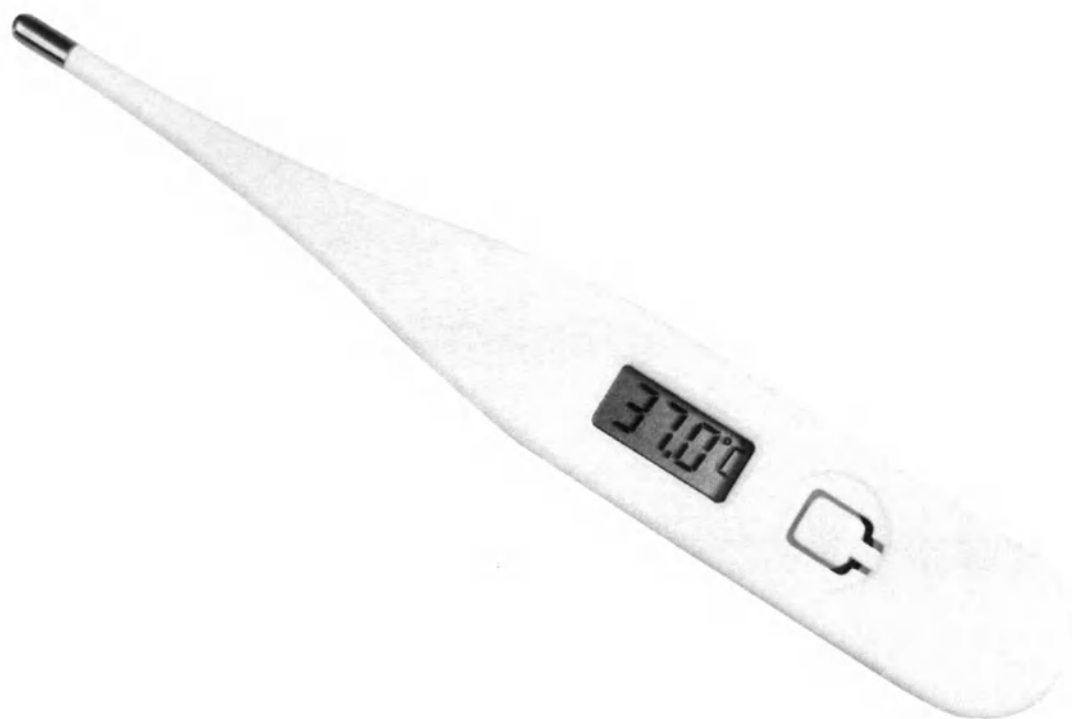

Термометр цифровой DMT-101

Инструкция по применению

JOYTECH 健拓

JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

на медицинское изделие

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®»

вариант исполнения

Термометр цифровой DMT-101

1. Наименование.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®»

Вариант исполнения:

Термометр цифровой DMT-101.

Состав:

1. Термометр медицинский электронный DMT – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Батарейка LR-41 торговых марок GP или СТАРТ – 1 шт.

2. Производитель.

JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. «ДЖОЙТЕХ ХЕЛСКЕА КО., ЛТД.»

No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China

Tel: +86-571-81957767

3. Назначение.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®», в вариантах исполнения (далее по тексту – термометр) для измерения температуры тела человека.

4. Показания к применению.

Термометр предназначен для измерения температуры человеческого тела в обычном режиме орально, ректально или под мышкой, устройства допускают многократное использование для людей любого возраста в клинических или домашних условиях. Не разрешено использование детьми без присмотра родителей.

5. Противопоказания к применению.

Термометр на данный момент не имеет задокументированных противопоказаний.

Термометр цифровой DMT-101

Батарейка LR-41 торговых марок GP или СТАРТ



Термометр цифровой DMT-1027 (фото в упаковке, лицо)



Термометр цифровой DMT-1027 (фото в упаковке, оборот)

здравсити

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ МОДЕЛЬ: DMT-1027

МАТЕРИАЛЫ:

- Корпус: АБС- пластик
- Колпачок: нержавеющая сталь.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ.

1. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
2. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится набор символов, подтверждающих исправность прибора (автоматический тест). После этого на 1 секунду на дисплее появится результат последнего измерения. Далее на дисплее отобразятся символы «37°C».
3. Затем появится символ «Lo» и мигающий символ «°C» - термометр готов к работе.

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

- Оральное измерение (время измерения -1 минута). Термометр расположите сбоку под языком. Для получения точного результата держите рот закрытым в течение всей процедуры измерения.
- Измерение в подмышечной впадине (время измерения-1 минута). Термометр располагайте в середине подмышечной впадины. Для получения точного результата необходимо, чтобы термометр как можно плотнее прилегал к коже подмышечной впадины. Прижмите руку к телу и удерживайте ее в таком положении до окончания измерения.
- Ректальное измерение (время измерения -1 минута). Ректальное измерение производится только в тех случаях, когда оно назначено врачом или невозможно провести измерение орально или аксиллярно. Датчик термометра помещается в анальное отверстие на 1,5-2,5 см. Если температура окружающей среды выше 32°C, вместо «Lo» отобразится ее температура. В случае необходимости повторного измерения следует дождаться остывания датчика.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Отключение прибора происходит после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» или автоматически - приблизительно через 8 минут после последнего измерения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Неправильное расположение градусника у детей из-за каловых масс может привести к перфорации прямой кишки.

СРОК ГОДНОСТИ:

Гарантийный срок на основной блок в корпусе: 1 год.

Срок годности (службы): 3 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Joytech Healthcare CO., LTD., No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China.

УПОЛН. ОРГАНИЗАЦИЯ/ПОСТАВЩИК/ИМПОРТЕР: ООО "А Сер", 142006, Российская Федерация, Московская область, г. Додолево, территория Триколор (Востраково мкр.), стр. 4, тел.: +7 (495) 926-50-50. www.azsotrap.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре от -20°C до +55°C и влажности не более 95 %.

LOT 210622

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 30.06.2021



Термометр цифровой DMT-1027



4 610116 208267

Термометр цифровой DMT-1027 (фото без упаковки)





JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

на медицинское изделие

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®»

вариант исполнения

Термометр цифровой DMT-1027

1. Наименование.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®»

Вариант исполнения:

Термометр цифровой DMT-1027.

Состав:

1. Термометр медицинский электронный DMT – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Батарейка LR-41 торговых марок GP или СТАРТ – 1 шт.

2. Производитель.

JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. «ДЖОЙТЕХ ХЕЛСКЕА КО., ЛТД.»

No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China

Tel: +86-571-81957767

3. Назначение.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®», в вариантах исполнения (далее по тексту – термометр) для измерения температуры тела человека.

4. Показания к применению.

Термометр предназначен для измерения температуры человеческого тела в обычном режиме орально, ректально или под мышкой, устройства допускают многократное использование для людей любого возраста в клинических или домашних условиях. Не разрешено использование детьми без присмотра родителей.

5. Противопоказания к применению.

Термометр на данный момент не имеет задокументированных противопоказаний.

Термометр цифровой DMT-1027

Батарейка LR-41 торговых марок GP или СТАРТ



Термометр цифровой гибкий DMT-423 (фото в упаковке, лицо)



Dr. Safe

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ ГИБКИЙ МОДЕЛЬ: DMT-423

МАТЕРИАЛЫ:

- Корпус: ABS-пластик
- Колпачок: нержавеющей стали.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

1. Нажимайте кнопку «Вкл/Выкл».
2. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится набор символов, подтверждающих исправность прибора (автоматический тест). После этого на 1 секунду на дисплее появится результат последнего измерения. Далее на дисплее отобразится символ «Lo» и мигающий символ «°C» - термометр готов к работе.
3. Затем появится символ «Lo» и мигающий символ «°C» - термометр готов к работе.

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

- Оральное измерение (время измерения - 1 минута). Термометр расположите сбоку под языком. Для получения точного результата держите рот закрытым в течение всей процедуры измерения.
- Измерение в подмышечной впадине (время измерения - 1 минута). Термометр располагайте в середине подмышечной впадины. Для получения точного результата необходимо, чтобы термометр как можно плотнее прилегал к коже подмышечной впадины. Прижмите руку к телу и удерживайте ее в таком положении до окончания измерения.
- Ректальное измерение (время измерения - 1 минута). Ректальное измерение проводится только в тех случаях, когда оно назначено врачом или невозможно провести измерение орально или аксиллярно. Датчик термометра помещается в анальное отверстие на 1,5-2,5 см. Если температура окружающей среды выше 32°C, вместо «Lo» отобразится ее температура. В случае необходимости повторного измерения следует дождаться остывания датчика.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Отключение прибора происходит после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» или автоматически - приблизительно через 8 минут после последнего измерения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Неправильное расположение градусника у детей из-за капризов может привести к перфорации прямой кишки.

СРОК ГОДНОСТИ:

Гарантийный срок на основной блок в корпусе: 1 год.

Срок годности (службы): 3 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Juytech Healthcare CO., LTD., No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China.

ИМПОРТЕР, ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВКИ И ЭКСПОРТЕР: ООО "А Зер", 142006, Российская Федерация, Московская область, г. Долово, территория Троицко-Липово (Истринское н.п.г.), стр. 4, тел.: +7 (495) 926-50-50, www.a3er.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре от -20°C до +55°C и влажности не более 95 %.

LOT 210622

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 30.06.2021



Термометр цифровой гибкий DMT-423



4 610116 208243

Термометр цифровой гибкий DMT-423 (фото без упаковки)



JOYTECH 健拓

JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

на медицинское изделие

**Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®»,
«Клинса medical®», «Dr. Safe®»**

вариант исполнения

Термометр цифровой гибкий DMT-423

1. Наименование.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®»

Вариант исполнения:

Термометр цифровой гибкий DMT-423.

Состав:

1. Термометр медицинский электронный DMT – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Батарейка LR-41 торговых марок GP или СТАРТ – 1 шт.

2. Производитель.

JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. «ДЖОЙТЕХ ХЕЛСКЕА КО., ЛТД.»

No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China

Tel: +86-571-81957767

3. Назначение.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®», в вариантах исполнения (далее по тексту – термометр) для измерения температуры тела человека.

4. Показания к применению.

Термометр предназначен для измерения температуры человеческого тела в обычном режиме орально, ректально или под мышкой, устройства допускают многократное использование для людей любого возраста в клинических или домашних условиях. Не разрешено использование детьми без присмотра родителей.

5. Противопоказания к применению.


Термометр на данный момент не имеет задокументированных противопоказаний.

Термометр цифровой DMT-4
Батарейка LR-41 торговых марок GP



Термометр цифровой DMT-423

Батарейка LR-41 торговых марок GP или СТАРТ

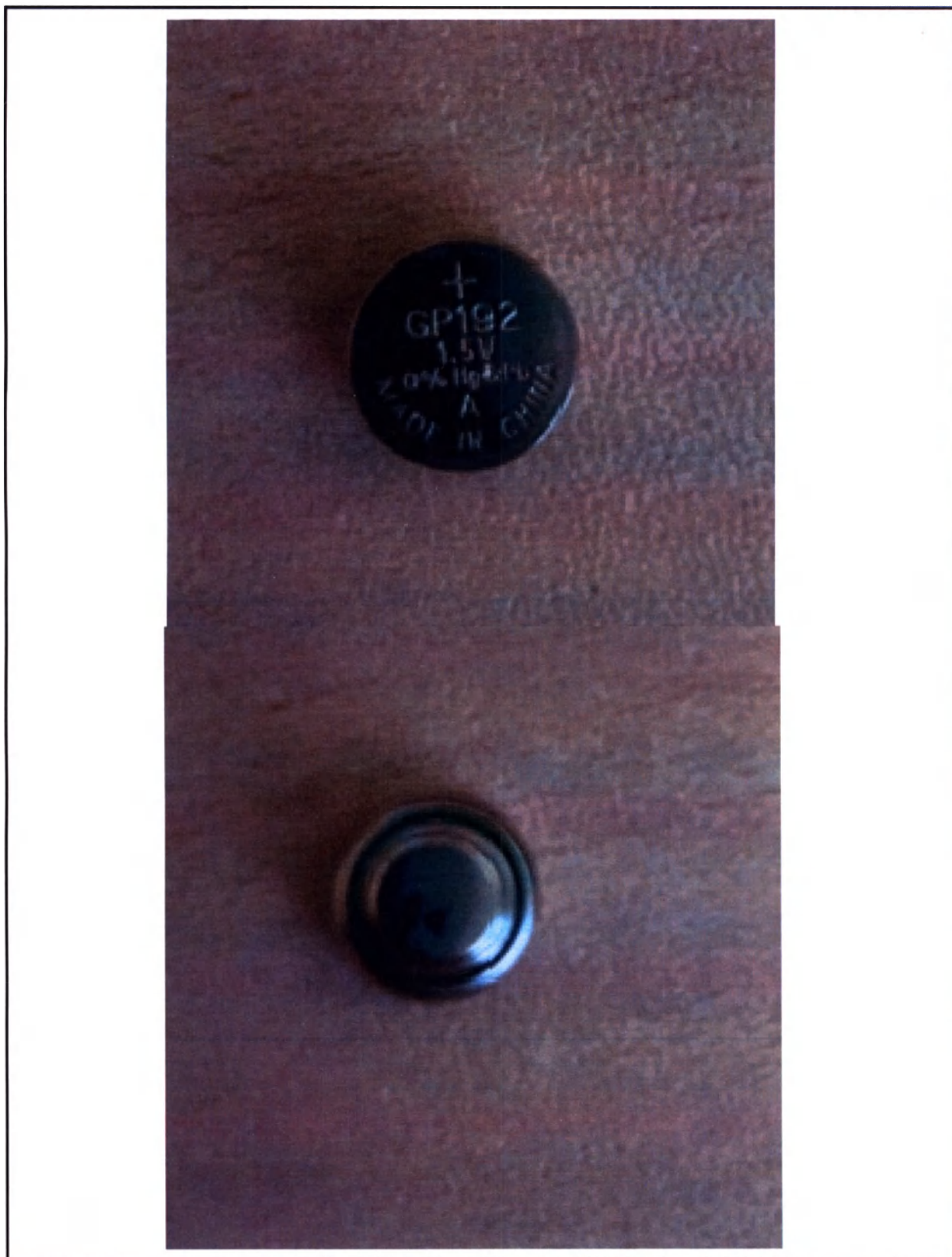

Термометр цифровой с имитацией ртутного DMT-4737 (фото в упаковке, лицо)



Dr. Safe

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ С ИМИТАЦИЕЙ РТУТНОГО МОДЕЛЬ: DMT-4737

МАТЕРИАЛЫ:

- Корпус: АБС-пластик
- Колпачок: нержавеющая сталь

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

1. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
2. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится набор символов, подтверждающих исправность прибора (автоматический тест). После этого на 1 секунду на дисплее появится результат последнего измерения. Далее на дисплее отобразятся символы «37°C».
3. Затем появится символ «Lo» и мигающий символ «°C» - термометр готов к работе.

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

- Оральное измерение (время измерения - 1 минута). Термометр расположите сбоку под языком. Для получения точного результата держите рот закрытым в течение всей процедуры измерения.
- Измерение в подмышечной впадине (время измерения - 1 минута). Термометр располагайте в середине подмышечной впадины. Для получения точного результата необходимо, чтобы термометр как можно плотнее прилегал к коже подмышечной впадины. Прижмите руку к телу и удерживайте ее в таком положении до окончания измерения.
- Ректальное измерение (время измерения - 1 минута). Ректальное измерение производится только в тех случаях, когда оно назначено врачом или невозможно провести измерение орально или аксиллярно. Датчик термометра помещается в анальное отверстие на 1,5-2,5 см. Если температура окружающей среды выше 32°C, вместо «Lo» отобразится ее температура. В случае необходимости повторного измерения следует дождаться остывания датчика.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
Отключение прибора происходит после нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» или автоматически - приблизительно через 8 минут после последнего измерения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Неправильное расположение градусника у детей из-за каловых масс может привести к перфорации прямой кишки.

СРОК ГОДНОСТИ:

Гарантийный срок на основной блок в корпусе: 1 год.

Срок годности (службы): 3 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Joytech Healthcare CO., LTD., No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China.

УПОЛН. ОРГАНИЗАЦИЯ/ПОСТАВЩИК/ИМПОРТЕР: ООО «А Зет», 142006, Российская Федерация, Московская область, г. Довольево, территория Триколор (Востраково мкр.), стр. 4, тел.: +7 (495) 926-50-50. www.azset.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: при температуре от -20°C до +55°C и влажности не более 95 %.

LOT 210622

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 30.06.2021



Термометр цифровой с имитацией
ртутного DMT-4737



4 610116 208281

Термометр цифровой с имитацией ртутного ДМТ-4737 (фото без упаковки)



Термометр цифровой DMT-4737

Инструкция по применению

JOYTECH 健拓

JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

на медицинское изделие

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®»,
«Клинса medical®», «Dr. Safe®»

вариант исполнения

Термометр цифровой с имитацией ртутного DMT-4737

1. Наименование.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®»

Вариант исполнения:

Термометр цифровой с имитацией ртутного DMT-4737.

Состав:

1. Термометр цифровой с имитацией ртутного DMT-4737 – 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.
3. Батарейка CR1225 торговых марок GP или START – 1

2. Производитель.

JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. «ДЖОЙТЕХ ХЕЛСКЕА КО., ЛТД.»

No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang, China

Tel: +86-571-81957767

3. Назначение.

Термометр медицинский электронный DMT торговых марок «Здравсити®», «Клинса medical®», «Dr. Safe®», в вариантах исполнения (далее по тексту – термометр) для измерения температуры тела человека.

4. Показания к применению.

Термометр предназначен для измерения температуры человеческого тела в обычном режиме орально, ректально или под мышкой, устройства допускают многократное использование для людей любого возраста в клинических или домашних условиях. Не разрешено использование детьми без присмотра родителей.

5. Противопоказания к применению.

Термометр на данный момент не имеет задокументированных противопоказаний.

Термометр цифровой DMT-4737

Батарейка CR1225 торговых марок GP или СТАРТ



Всего прошито и скреплено печатью 21

Листа (ов).

Подпись

МП



ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ В РФ
И СТРАНАХ СНГ ООО «А ЗЕТ»
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №04 ОТ 30.12.2020 Г.
/КВАСКО М.А./