

ОКПД2 32.50.13.110

УТВЕРЖДАЮ



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Зонд стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке,
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-69171175-2021**

Производства: ООО «Юникорнмед», Россия
188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380

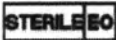
Санкт-Петербург
2023

Макет маркировки зонда желудочного (типоразмеры (10-34F/Ch)×1100мм):

Зонд стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-69171175-2021:

Зонд стерильный, одноразовый желудочный 3,30мм (10F/Ch)×1100мм с краткой инструкцией на упаковке в составе:

1) Зонд стерильный, одноразовый желудочный 3,30мм (10F/Ch)×1100мм – 1 шт.

- Стерилизация оксидом этилена  
- Не токсично
- Для однократного применения  
- Не использовать при повреждении упаковки 
- Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре



ООО «Юникорнмед»

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, Мельничная д.18 лит.А info@unicmed.ru

Место

ООО «Юникорнмед»

производства: 188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380

АРТИКУЛ:*****

LOT

161219



2019-12



2024-11



СанПиН 2.1.3684-21
(класс Б)

Наличие рентген контрастной полосы

Марка используемого материала для рентген контрастной полосы - проволока платина/иридий Pt-Ir 90/10.

НАЗНАЧЕНИЕ: для введения в желудочно-кишечный тракт через рот или через нос с целью обеспечения питания и/или аспирации, извлечения образцов для диагностики и введения лекарственных средств.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗМЕЩЕНА НА UNICMED.RU):

ПОДГОТОВКА: проверьте целостность упаковки и срок годности изделия; предварительно положите зонд в морозилку (зонд должен находиться в морозильной камере не менее 1,5 часов до начала процедуры; при экстренной установке зонд предварительно поместите в лёд; зонд становится жестким и холодным, что облегчает установку и снижает рвотный рефлекс у пациента); наденьте перчатки; вскройте упаковку; извлеките зонд, не нарушая его стерильность; приступите к работе.

При использовании зонда должна применяться техника безопасности. Введение зонда должно производиться квалифицированным медицинским персоналом. При введении зонда пациенту в бессознательном состоянии правильное положение зонда в желудке желательно подтвердить рентгенографией.

ВВЕДЕНИЕ: определите глубину введения и нанесите отметку на зонд (через рот в желудок вводят зонд большого диаметра, через носовой ход - зонд малого диаметра); с помощью шприца в зонд введите 1–2 мл воздуха и аккуратно продвигайте зонд до отметки (по урчанию в эпигастральной области определите положение зонда); произведите отбор биоматериала; после окончания процедуры аккуратно извлеките и утилизируйте зонд.

Зондирование длится около 10–15 минут.

РУ №

Макет маркировки зонда питательного (типоразмеры (04-10F/Ch)×400мм):

Зонд стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-69171175-2021:

Зонд стерильный, одноразовый питательный 1,33мм (04F/Ch)×400мм с краткой инструкцией на упаковке в составе:

1) Зонд стерильный, одноразовый питательный 1,33мм (04F/Ch)×400мм – 1 шт.



ООО «Юникорнмед»

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, Мельничная д.18 лит.А info@unicmed.ru

Место ООО «Юникорнмед»

производства: 188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380

- Стерилизация оксидом этилена
- Не токсично
- Для однократного применения
- Не использовать при повреждении упаковки
- Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре

Наличие рентген контрастной полосы

Марка используемого материала для рентген контрастной полосы - проволока платина/иридий Pt-Ir 90/10.

АРТИКУЛ:*****

LOT 160219

2019-02 2024-01



СанПиН 2.1.3684-21
(класс Б)

РУ №

НАЗНАЧЕНИЕ: для введения в желудочно-кишечный тракт через рот или через нос с целью обеспечения питания и/или аспирации, извлечения образцов для диагностики и введения лекарственных средств.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗМЕЩЕНА НА UNICMED.RU):

ПОДГОТОВКА: проверьте целостность упаковки и срок годности изделия; предварительно положите зонд в морозилку (зонд должен находиться в морозильной камере не менее 1,5 часов до начала процедуры; при экстренной установке зонд предварительно поместите в лёд; зонд становится жестким и холодным, что облегчает установку и снижает рвотный рефлекс у пациента); наденьте перчатки; вскройте упаковку; извлеките зонд, не нарушая его стерильность; приступите к работе.

При использовании зонда должна применяться техника безопасности. Введение зонда должно производиться квалифицированным медицинским персоналом. При введении зонда пациенту в бессознательном состоянии правильное положение зонда в желудке желательно подтвердить рентгенографией.

ВВЕДЕНИЕ: определите глубину введения и нанесите отметку на зонд (через рот в желудок вводят зонд большого диаметра, через носовой ход - зонд малого диаметра); с помощью шприца в зонд введите 1–2 мл воздуха и аккуратно продвигайте зонд до отметки (по урчанию в эпигастриальной области определите положение зонда); произведите отбор биоматериала; после окончания процедуры аккуратно извлеките и утилизируйте зонд.

Зондирование осуществляется на срок до 2-х недель..

ИЛИ

Зонд стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-69171175-2021:

Зонд стерильный, одноразовый питательный 3,30мм (10F/Ch)×400мм

С краткой инструкцией на упаковке в составе:

1) Зонд стерильный, одноразовый питательный 3,30мм (10F/Ch)×400мм – 1 шт;

- Стерилизация оксидом этилена
- Не токсично
- Для однократного применения
- Не использовать при повреждении упаковки
- Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре



ООО «Юникормед»

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, Мельничная д.18 лит.А info@unicmed.ru

Место ООО «Юникормед»

производства: 188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380

АТИКУЛ:*****

LOT 26042019

2019-04
2024-03



СанПиН 2.1.3684-21
(класс Б)

Наличие рентген контрастной полосы

Марка используемого материала для рентген контрастной полосы - проволока платина/иридий Pt-Ir 90/10.

НАЗНАЧЕНИЕ: для введения в желудочно-кишечный тракт через рот или через нос с целью обеспечения питания и/или аспирации, извлечения образцов для диагностики и введения лекарственных средств.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗМЕЩЕНА НА UNICMED.RU):

ПОДГОТОВКА: проверьте целостность упаковки и срок годности изделия, предварительно положите зонд в морозилку (зонд должен находиться в морозильной камере не менее 1,5 часов до начала процедуры; при экстренной установке зонд предварительно поместите в лёд, зонд становится жестким и холодным, что облегчает установку и снижает рвотный рефлекс у пациента), наденьте перчатки, вскройте упаковку, извлеките зонд, не нарушая его стерильность, приступайте к работе.

При использовании зонда должна применяться техника безопасности. Введение зонда должно производиться квалифицированным медицинским персоналом. При введении зонда пациенту в бессознательном состоянии правильное положение зонда в желудке желательно подтвердить рентгенографией.

ВВЕДЕНИЕ: определите глубину введения и нанесите отметку на зонд (через рот в желудок вводят зонд большого диаметра, через носовой ход - зонд малого диаметра), с помощью шприца в зонд введите 1-2 мл воздуха и аккуратно продвигайте зонд до отметки (по урчанию в эпигастриальной области определите положение зонда); произведите отбор биоматериала; после окончания процедуры аккуратно извлеките и утилизируйте зонд.

Зондирование осуществляется на срок до 2-х недель.

РУ №

Макет маркировки зонда питательного (типоразмеры (10-20F/Ch)×1200мм):

Зонд стерильный, одноразовый с краткой инструкцией на упаковке, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-001-69171175-2021:

Зонд стерильный, одноразовый питательный 3,30мм (10F/Ch)×1200мм с краткой инструкцией на упаковке в составе:

1) Зонд стерильный, одноразовый питательный 3,30мм (10F/Ch)×1200мм – 1 шт.

АРТИКУЛ:*****

LOT 160520
2020-05
2025-04

- Стерилизация оксидом этилена  
- Не токсично
- Для однократного применения  
- Не использовать при повреждении упаковки 
- Хранить в сухом, проветриваемом, защищенном от света месте при комнатной температуре



ООО «Юникормед»

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, Мельничная д.18 лит.А info@unicmed.ru

Место ООО «Юникормед»

производства: 188679, ЛО, Всеволожский р-н, пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, строение №380



СанПиН 2.1.3684-21
(класс Б)

Наличие рентген контрастной полосы

Марка используемого материала для рентген контрастной полосы - проволока платина/иридий Pt-Ir 90/10.

НАЗНАЧЕНИЕ: для введения в желудочно-кишечный тракт через рот или через нос с целью обеспечения питания и/или аспирации, извлечения образцов для диагностики и введения лекарственных средств.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗМЕЩЕНА НА UNICMED.RU):

ПОДГОТОВКА: проверьте целостность упаковки и срок годности изделия; предварительно положите зонд в морозилку (зонд должен находиться в морозильной камере не менее 1,5 часов до начала процедуры; при экстренной установке зонд предварительно поместите в лёд; зонд становится жестким и холодным, что облегчает установку и снижает рвотный рефлекс у пациента); наденьте перчатки; вскройте упаковку; извлеките зонд, не нарушая его стерильность; приступите к работе.

При использовании зонда должна применяться техника безопасности. Введение зонда должно производиться квалифицированным медицинским персоналом. При введении зонда пациенту в бессознательном состоянии правильное положение зонда в желудке желательно подтвердить рентгенографией.

ВВЕДЕНИЕ: определите глубину введения и нанесите отметку на зонд (через рот в желудок вводят зонд большого диаметра, через носовой ход - зонд малого диаметра); с помощью шприца в зонд введите 1–2 мл воздуха и аккуратно продвигайте зонд до отметки (по урчанию в эпигастриальной области определите положение зонда); произведите отбор биоматериала; после окончания процедуры аккуратно извлеките и утилизируйте зонд.

Зондирование осуществляется на срок до 2-х недель.

РУ №

Прошито, пронумеровано и

Скреплено 5 листов

ООО «Юникорнмед»

Генеральный директор Осипов Д. Ю.

Подпись _____

«20» сентября 2023г.

