

Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие

«Концентратор кислородный CS Medica, в вариантах исполнения»



КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ CS Medica

Модель: CS-011L

Электрические параметры: $\sim 220V \pm 22V$, $50Hz \pm 1Hz$

Номинальная мощность: $\leq 100W$

Производительность: 1-5 LPM

Концентрация кислорода на выходе: $\sim 32\% \sim 90\%$

Давление на выходе: 30~50 kPa

Не используйте масло, жир и другие легковоспламеняющиеся маслянистые жидкости вблизи концентратора.



Foshan MIC Medical
Technology Co., Ltd.,
Unit 501-1 and 503, 5th Floor,
No. 7 Building, Zone A,
Hantian Industrial Park,
17th Shenhai Road,
Guicheng, Nanhai,
528200 Foshan Guangdong,
China

Сделано в Китае



SN



Напоминание

Перед использованием прибора разрежьте, удалите и выбросьте крепежи, затем удалите данный стикер.



Уважаемые покупатели, перед использованием прибора, разрежьте крепежи на дне прибора, удалите и выбросьте их. Затем удалите данный стикер.

Напоминание

Маркировка концентратора кислородного CS Medica CS-013L



КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ CS Medica Модель: CS-013L

Электрические параметры:
~220V±22V, 50Hz±1Hz, 1A

Производительность: 0,5-3 LPM

Концентрация кислорода: ≥ 90%


Номинальная мощность: 210W

Давление на выходе: 40-60 kPa

Режим работы (ингалятор):


30 min/30 min

Не используйте масло, жир
и другие легковоспламеняющиеся
маслянистые жидкости вблизи
концентратора.

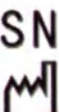

Foshan MIC Medical Technology Co., Ltd.,
Unit 501-1 and 503, 5th Floor, No. 7 Building,
Zone A, Hantian Industrial Park,
17th Shenhai Road, Guicheng, Nanhai,
528200 Foshan Guangdong, China

Сделано в Китае

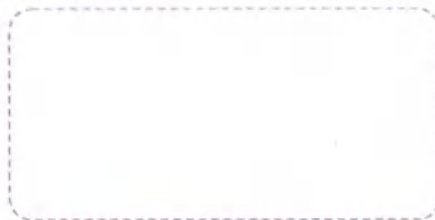

Уважаемые покупатели,
перед использованием
прибора, разрежьте
крепежи на дне прибора,
удалите и выбросьте их.
Затем удалите данный
стикер.

Напоминание

CS КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ CS Medica

MEDICA Модель: CS-015L

Электрические параметры: ~ 220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1Hz 1.6A

Давление на выходе: 40~60 kPa

Производительность: 1-5 LPM

Концентрация кислорода на выходе: 90% $\pm$ 3%

Номинальная мощность: 320W

Не используйте масло, жир и другие легковоспламеняющиеся маслянистые жидкости вблизи концентратора.

ВНИМАНИЕ. Используйте прибор строго по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

ОПАСНО. При уходе и техническом обслуживании прибора используйте только рекомендованные производителем детали. Велика вероятность взрыва. Не используйте рядом с прибором легковоспламеняющиеся вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Возможно поражение электрическим током, не снимайте корпус прибора. Все работы по техническому обслуживанию прибора должен проводить специалист центра технического обслуживания.

Не используйте прибор рядом с горячими предметами и источниками открытого огня.

Не курите рядом с прибором или рядом с человеком, использующим кислородную терапию.



Foshan MIC Medical Technology Co., Ltd.,
Unit 501-1 and 503, 5th Floor, No. 7 Building,
Zone A, Hantian Industrial Park,
17th Shenhai Road, Guicheng, Nanhai,
528200 Foshan Guangdong, China
Сделано в Китае

SN



Напоминание

Перед использованием прибора разрежьте, удалите и выбросьте крепежи, затем удалите данный стикер.



Уважаемые покупатели, перед использованием прибора, разрежьте крепежи на дне прибора, удалите и выбросьте их. Затем удалите данный стикер.

Напоминание

Маркировка упаковки для аксессуаров для ингаляции: небулайзерной камеры, загубника, воздуховодной трубки (для модели CS-013L)



Аксессуары для ингаляции

Использование.

1. Налейте лекарственное средство, назначенное Вашим лечащим врачом, в резервуар для лекарственного средства предварительно открутив крышку небулайзерной камеры.
2. Установите крышку на небулайзерную камеру и соедините отметки.
3. Разместите загубник на крышке небулайзерной камеры.
4. Прикрепите один конец воздуховодной трубки к небулайзерной камере и другой конец трубки к выходу для ингаляции (Nebulization outlet) на приборе.
5. Установите поток на приборе согласно назначению Вашего лечащего врача.
6. Для оптимальных результатов, периодически постукивайте по небулайзерной камере во время ингаляции.

Осторожно.

1. Аксессуары для ингаляции предназначены строго для индивидуального использования. Выбрасывайте аксессуары после окончания срока службы.
2. Не используйте аксессуары, если упаковка была открыта или повреждена.
3. Не храните аксессуары в условиях экстремально высоких и экстремально низких температуре и влажности. Храните в прохладном и сухом месте.
4. Убедитесь, что все соединения надежные и воздух свободно проходит по воздуховодной трубке.

LOT : XXXXXX

Маркировка на упаковке

Концентратор кислородный CS Medica CS-011L





OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-011L



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-011L




Выбираем
здоровье



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-011L

Производительность:	1-5 л/мин
Концентрация кислорода на выходе:	32%~90%
Условия хранения и транспортирования:	
температура окружающего воздуха:	от -20 до 55°C
относительная влажность:	от 40 до 93%, без конденсата
атмосферное давление:	от 50 до 106 кПа
Oxygen flow:	1-5 L/min
Oxygen purity:	32%~90%
Storage and Transport conditions:	
Temperature:	-20 to 55°C
Humidity:	40 to 93% no condensation
Air pressure:	50 to 106 kPa

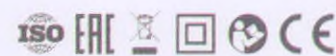



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-011L



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-011L



Выбираем
здоровье



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-011L

ООО «СиЭс Медика»
Импортёр и уполномоченный представитель производителя,
официальный представитель торговой марки CS Medica на территории
Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза.


125493, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головиноский,
ул. Смольная, д. 14
Тел.: (495) 363-16-52

www.csmedica.ru
E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Сделано в Китае

Производитель:
Foshan MIC Medical Technology Co., Ltd.,
Unit 501-1 and 503, 5th Floor, No. 7 Building, Zone A,
Nanlian Industrial Park, 17th Shenhai Road,
Guicheng, Nanhai, 528200 Foshan Guangdong, China
(Фосан МИК Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.,
Юнит 501-1 и 503, 5 Флор, Но. 7 Билдинг, Зоун А,
Ханлиан Индастриал Парк, 17 Шенхай Род,
Гуиченг, Нанхай, 528200 Фосан Гуангдонг, Китай)

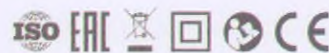

Концентратор кислородный CS Medica CS-013L





OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-013L



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-013L



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-013L

Производительность:	0,5 – 3 л/мин
Концентрация кислорода на выходе:	≥ 90%
Условия хранения и транспортирования:	
температура окружающего воздуха:	от – 20 до 55 °С
относительная влажность:	от 40 до 93%, без конденсата
атмосферное давление:	от 50 до 106 кПа
Oxygen flow:	0,5 – 3 L/min
Oxygen purity:	≥ 90%
Storage and Transport conditions:	
Temperature:	– 20 to 55 °C
Humidity:	40 to 93% no condensation
Air pressure:	50 to 106 kPa



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-013L



Выбираем
здоровье



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-013L

ООО «СиЭс Медика»
Импортер и уполномоченный представитель производителя,
официальный представитель торговой марки CS Medica
на территории Российской Федерации,
в рамках Евразийского экономического союза.

125493, г. Москва
внтерг. муниципальный округ Головинский, ул. Смольная, д. 14
Тел.: +7 (495) 363-16-52

www.csmedica.ru
E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80

Сделано в Китае

Производитель:
Foshan MC Medical Technology Co., Ltd.,
Unit 501-1 and 503, 5th Floor, No. 7 Building, Zone A,
Nanhai Industrial Park, 17th Shenhui Road, Gulchong,
Nanhai, 528200 Foshan Guangdong, China.
(Фосан МК Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.,
Юнит 501-1 и 503, 5 Флор. Но. 7 Билдинг, Зона А,
Ханхай Индустриал Парк, 17 Шенхай Роуд, Гуанчонг,
Нанхай, 528200 Фосан Гуандунг, Китай)




OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-013L




Выбираем
здоровье

Концентратор кислородный CS Medica CS-015L

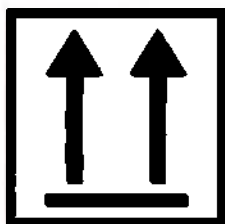


Верх товара

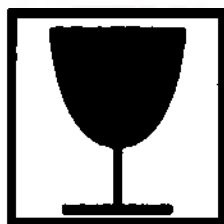


Осторожно.
Хрупкое



Беречь от влаги

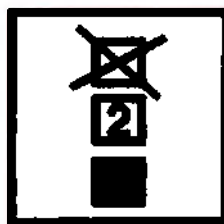

Предел
по количеству
ярусов
в штабеле

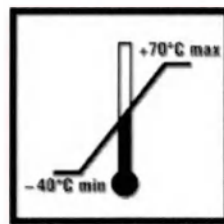

Температурный
диапазон
окружающего
воздуха

EAC



0197

SN

Маркировка на упаковке назальной канюли с кислородной трубкой (для моделей CS-011L, CS-013L, CS-015L)

Назальная канюля с кислородной трубкой, длиной 2,5 м



Внутренняя полость трубки
в форме шестигранной звезды

LOT YYMNNNNN

Предупреждение

- Назальная канюля с кислородной трубкой должны быть использованы строго в соответствии с инструкцией к Вашему кислородному концентратору.
- Храните назальную канюлю с кислородной трубкой в прохладном и сухом месте.
- В назальной канюле и кислородной трубке не используется латекс.

Использование

1. Подсоедините один конец кислородной трубки с назальной канюлей к распылителю на увлажнителе Вашего кислородного концентратора.
2. Введите назальную канюлю в полость носа.
3. Расположите трубки за ушами и под подбородком, и зафиксируйте трубку путем плавного перемещения подвижного регулировочного элемента.
4. Установите указанную врачом скорость потока кислорода.



SN

OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ
Model (Модель):
CS-015L



ООО «СиЭс Медика»

Импортер и уполномоченный представитель производителя, официальный представитель торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза.

Manufacturer:

Foshan MIC Medical Technology Co., Ltd.,
 Unit 501-1 and 503, 5th Floor, No. 7 Building, Zone A,
 Hantian Industrial Park, 17th Shenhai Road, Guicheng, Nanhai,
 528200 Foshan Guangdong, China

(Производитель):

Фосан МИК Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.,
 Юнит 501-1 и 503, 5 Флор, Но. 7 Билдинг, Зоун А,
 Хантиан Индастриал Парк, 17 Шенхай Род, Гуиченг, Нанхай,
 528200 Фосан Гуандонг, Китай
 Сделано в Китае

Юридический адрес:

125493, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский,
 ул. Смольная, д.14

Почтовый адрес:

125493, г. Москва, а/я 277
 Тел.: (495) 363-16-52
 E-mail: csinfo@csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80
www.csmedica.ru



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ

Model (Модель):
CS-015L




Производительность 1-5 л/мин

CE 0197



OXYGEN CONCENTRATOR
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ

Model (Модель):
CS-015L

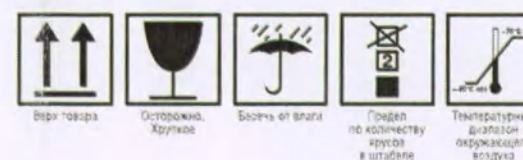

STORAGE CONDITION

TEMPERATURE:
 - 40 to 70 °C

HUMIDITY:
 10 to 100%


AIR PRESSURE:
 50 to 106 hPa

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
 И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

ТЕМПЕРАТУРА
 ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА:
 от - 40 до 70 °C

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:
 от 10 до 100%

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ:
 от 50 до 106 кПа

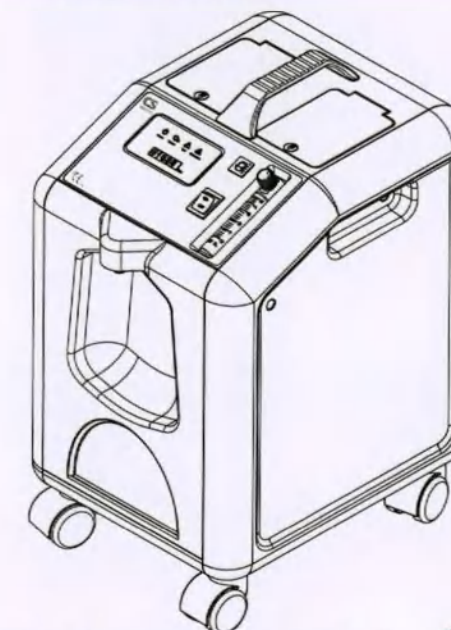

Производительность 1-5 л/мин

CE 0197

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СИЭС МЕДИКА

Исакова



ПРОШУРОВАННО

12 ЛИСТОВ

Фотографические изображения медицинского изделия:

«Концентратор кислородный CS Medica, в вариантах исполнения»



Концентратор кислородный CS Medica CS-011L, в комплектации:

1. Концентратор кислородный



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ CS Medica CS-011L




Благодарим Вас за приобретение концентратора кислородного CS Medica CS-011L.




Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до начала использования данного прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в конце настоящего руководства по эксплуатации. При покупке прибора требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

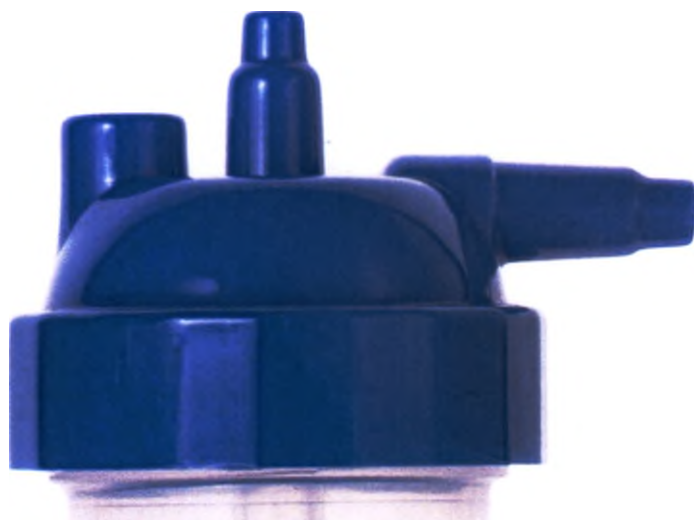





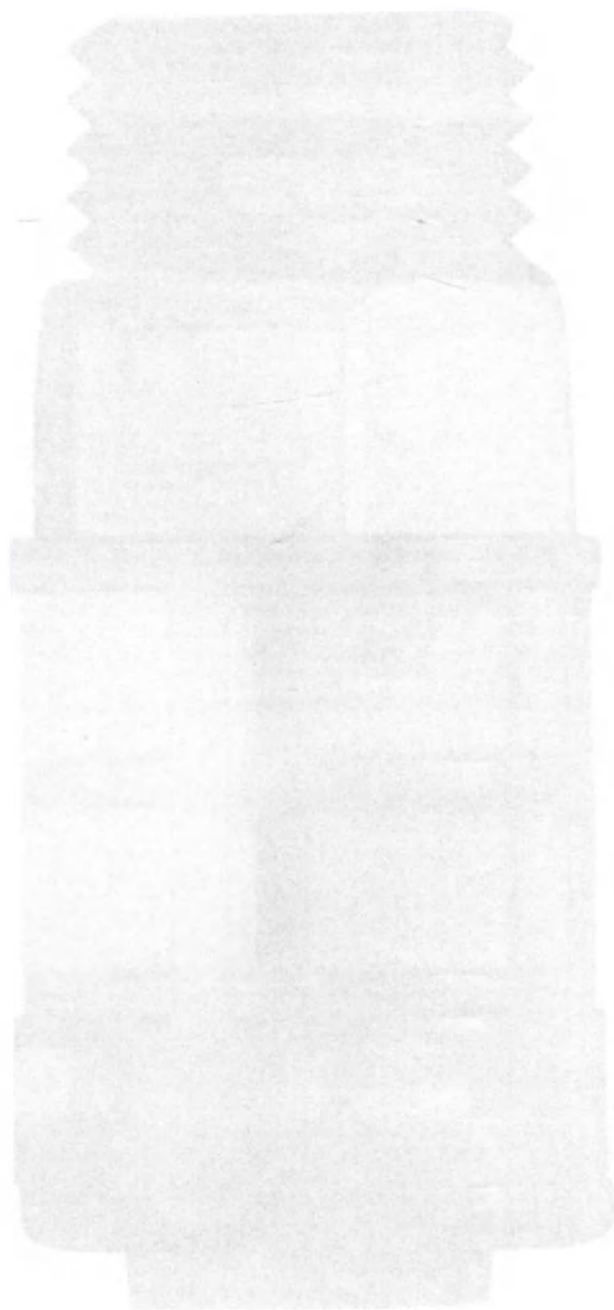


Концентратор кислородный CS-013L в собранном виде



Концентратор кислородный CS Medica CS-013L, в комплектации:
1. Концентратор кислородный



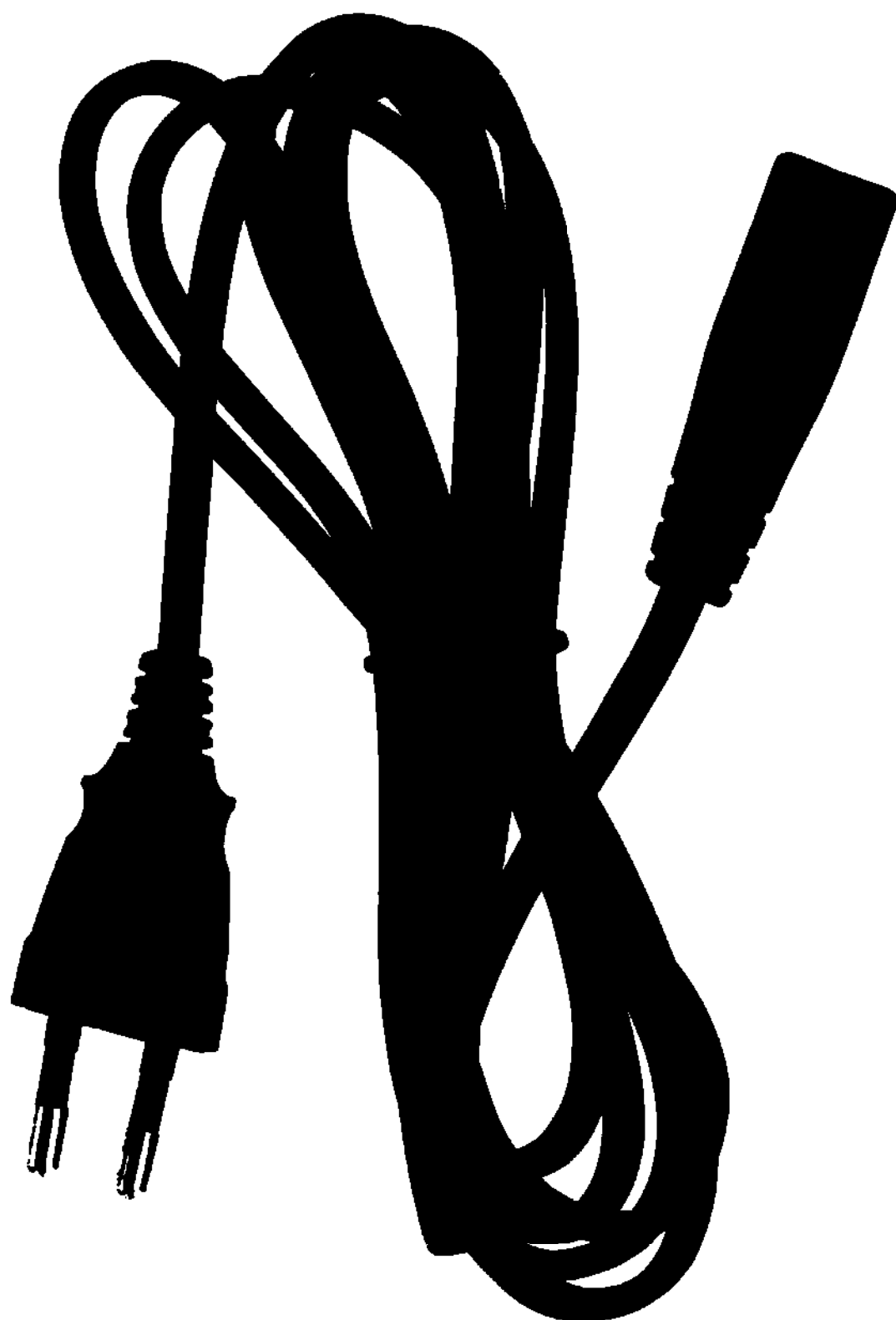

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ CS Medica CS-013L



Благодарим Вас за приобретение концентратора кислородного CS Medica CS-013L.



Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до начала использования данного прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в конце настоящего руководства по эксплуатации. При покупке прибора требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.


Увлажнитель




Соединительная трубка






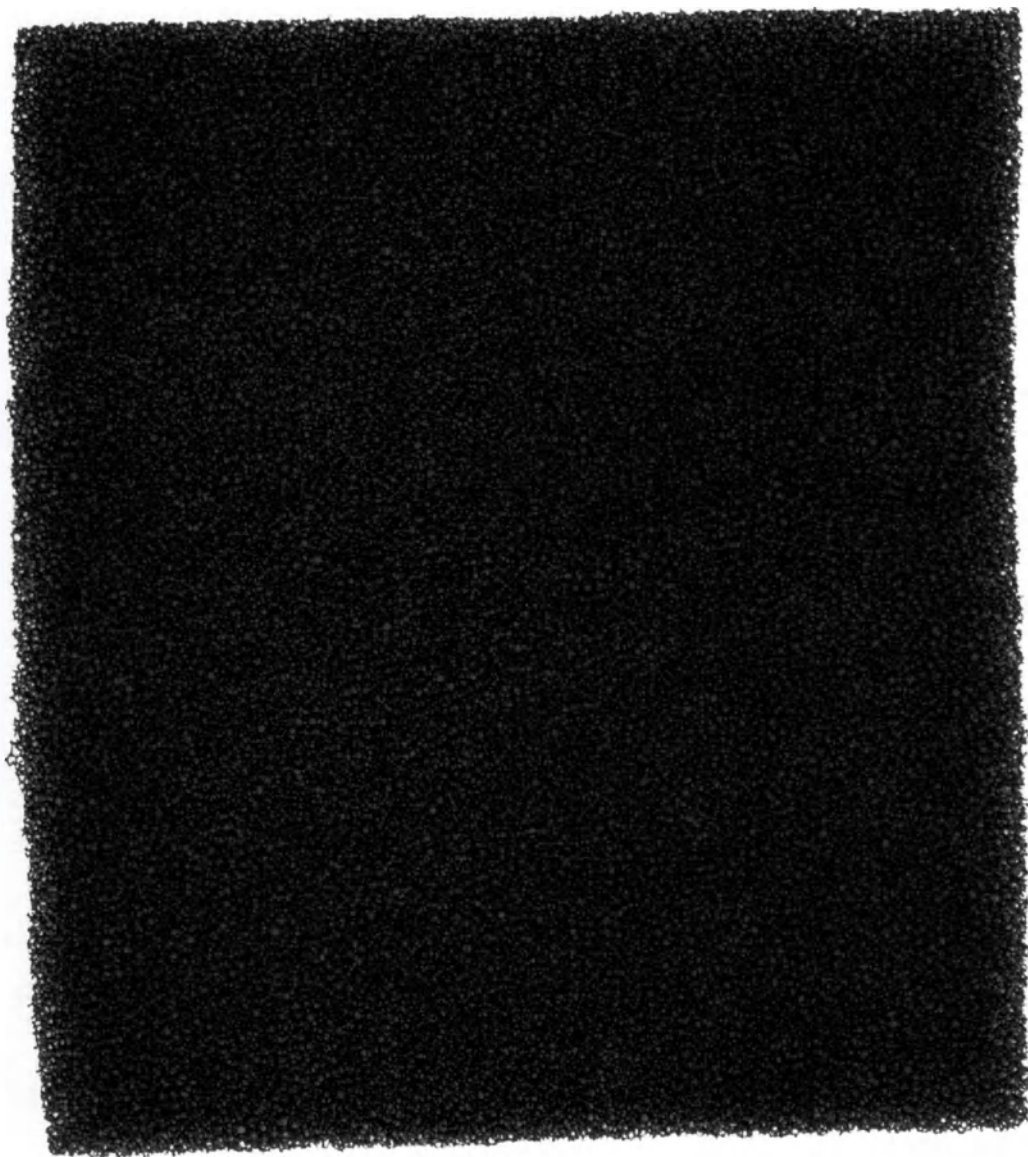

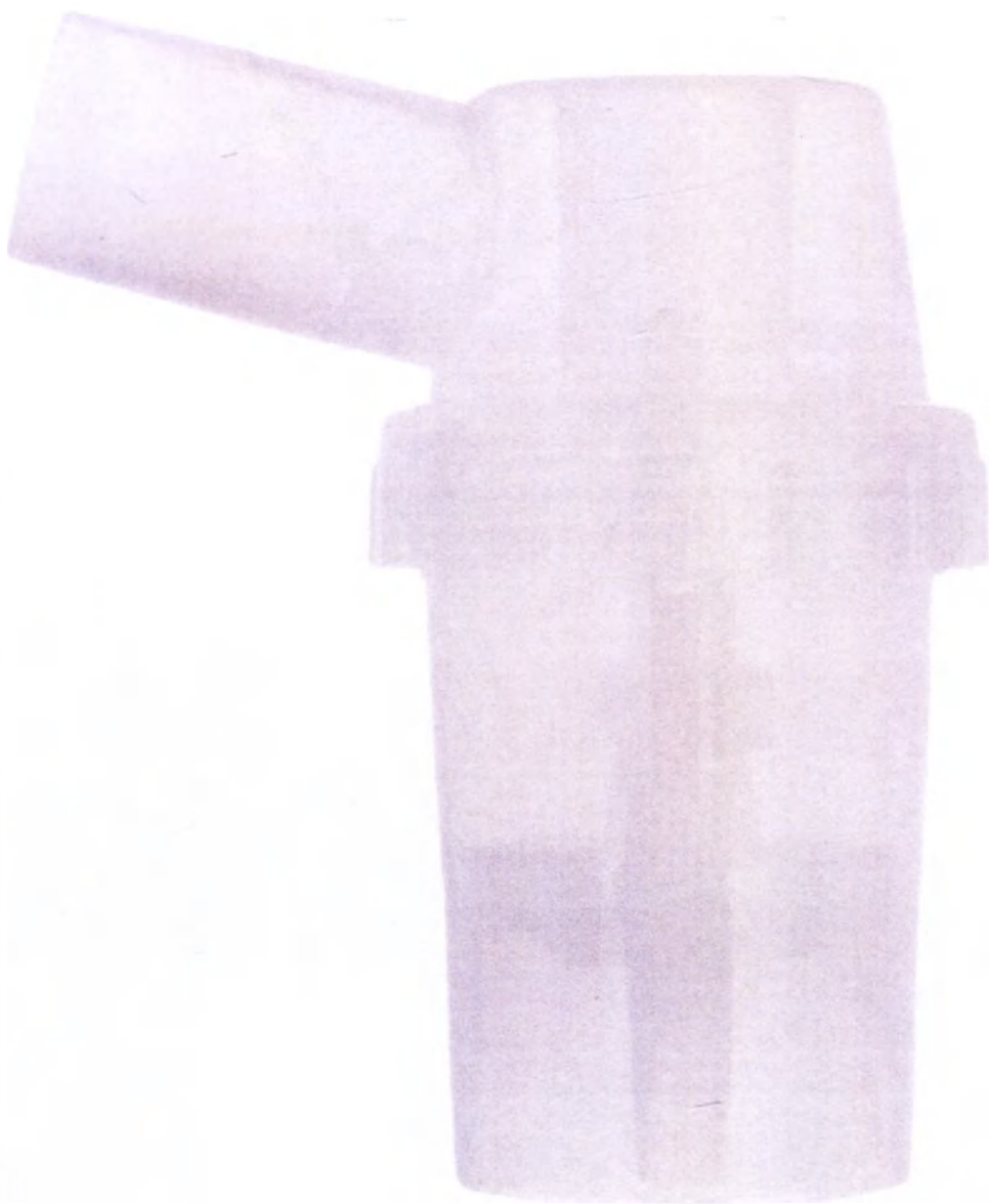



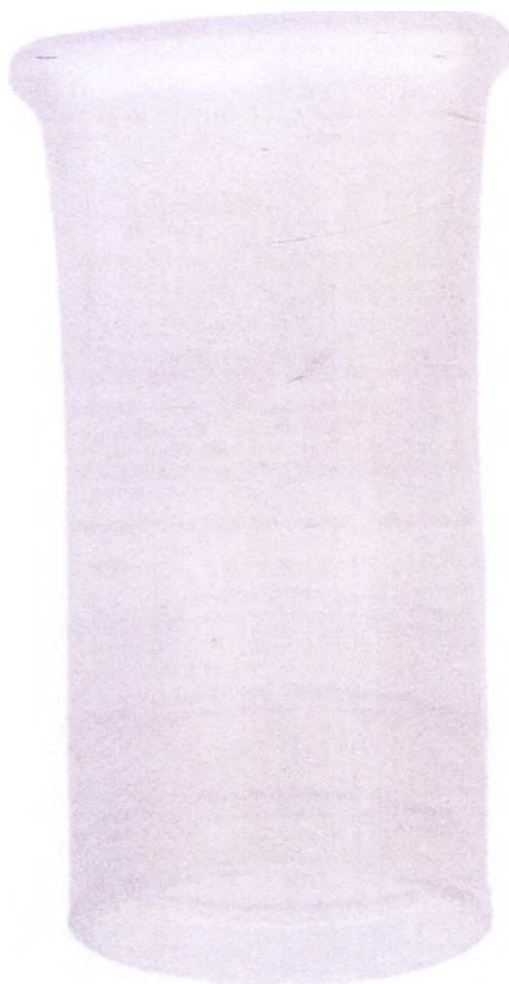

Концентратор кислородный CS-013L в собранном виде



Инструкция по эксплуатации

Модель	CS-013L
Серия	013L

КОНЦЕНТРАТОР
КИСЛОРОДНЫЙ
CS Medica CS-013L

Концентратор кислородный CS Medica CS-015L, в комплектации:
Концентратор кислородный





КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДНЫЙ CS Medica CS-015L



Благодарим Вас за приобретение концентратора кислородного CS Medica CS-015L.



Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до начала использования данного прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.


Гарантийный талон находится в конце настоящего руководства по эксплуатации. При покупке прибора требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

/влажнитель





Фильтр грубой очистки

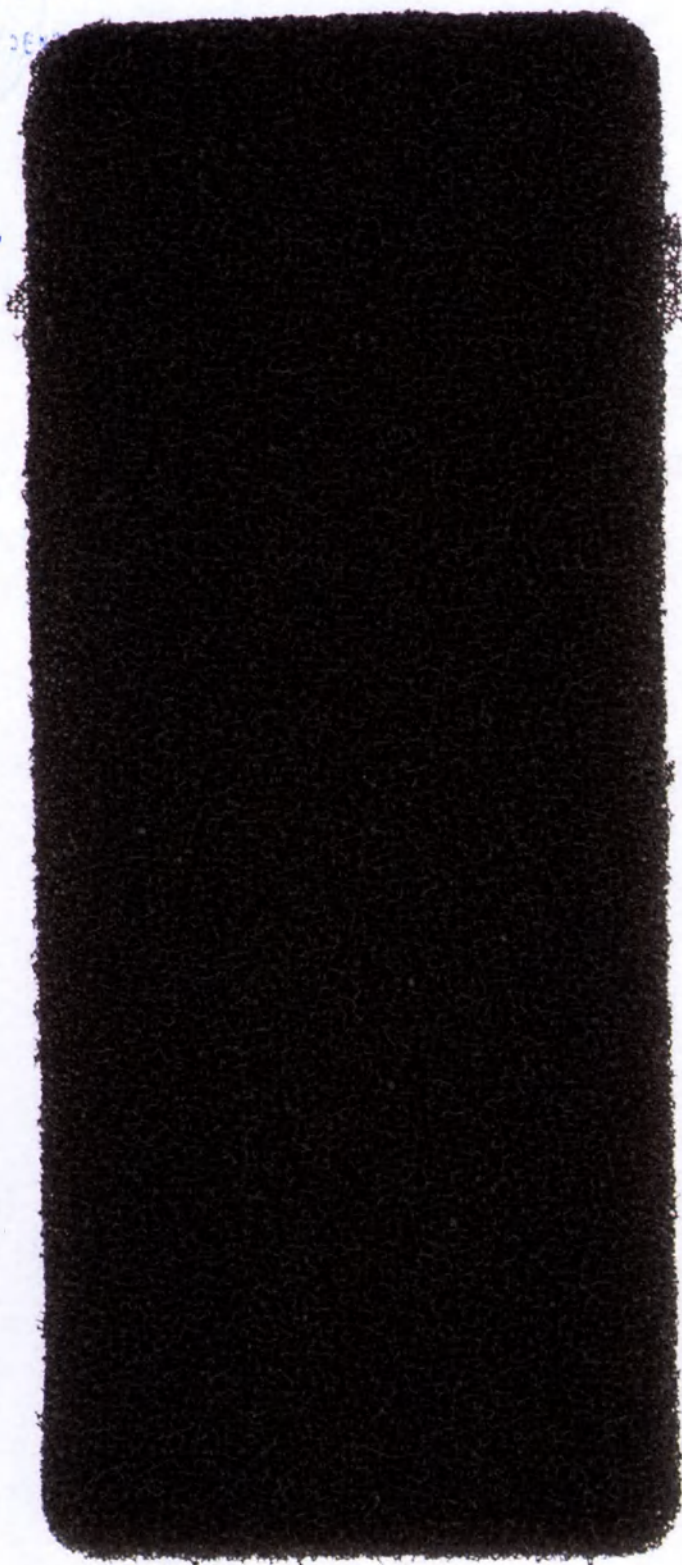

ПРОШУРОВАННО

25

ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СИЭС МЕДИКА

Исаков А. Б.

