

«УТВ»

Генеральный директор

ООО «ДОКТОР МЕБЕЛЬ»



Якимов Ю.В.

2021 г.

МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ

по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021

Руководство по эксплуатации

ДМ.32924160.013.РЭ

Дата последнего пересмотра: 28.09.2021 г.

2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	18
3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	19
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	21
5 УТИЛИЗАЦИЯ	22
6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ	23
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	24
8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	25
9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	28
ПРИЛОЖЕНИЕ В	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.....	47

Данное руководство по эксплуатации распространяется на медицинское изделие «Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021» (далее – Мойка), предназначенное для мытья и иных манипуляций с лабораторной посудой, инструментами, материалами и иными изделиями в том числе мытья медицинских инструментов и принадлежностей; в различных специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СанПин 2.1.3678-20 (например: процедурный кабинет, перевязочный кабинет, моечная при операционной, малой операционной или реанимационной, в лабораториях и т.д. помещениях где происходит манипуляция и очистка изделий применяемых в медицинском учреждении), в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Область применения: Использование в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20.

Мойка предназначена для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Показания к применению мойки: Мытье и иные манипуляции с лабораторной посудой, инструментами, материалами и иными изделиями в том числе мытье медицинских инструментов и принадлежностей

Противопоказания к применению мойки: Не установлены в рамках предусмотренного производителем применения.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением мойки по назначению: Не выявлены.

Риски применения мойки: Анализ рисков применения был произведен ООО «Доктор мебель» в полном объеме и представлен в Файле менеджмента риска. Меры по снижению рисков применения мойки приведены в мерах предосторожности.

Мойка выпускается в сериях ДМ-1, ДМ-2, ДМ-3 и ДМ-4 в зависимости от используемых материалов.

Мойка серии ДМ-1 представляет собой жёсткую каркасную конструкцию из алюминиевого профиля, с заполнением панелями полипропилена. Двери распашные и фасады ящиков выдвижных выполнены из гнутого оцинкованного листа с покрытием полиэфирной порошковой краской с наполнением из базальтовых матов (двери распашные) или полипропилена (фасады ящиков выдвижных).

Мойка серии ДМ-2 представляет собой жёсткую каркасную конструкцию из алюминиевого профиля, с заполнением панелями ЛДСП, откидная панель под раковиной изготовлена из полипропилена. Наружная сторона дверей распашных сплошных и фасады выдвижных ящиков выполнены из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской с наполнением из панелей ЛДСП.

Мойка серии ДМ-3 представляет собой конструкцию с вертикальным несущим каркасом, с заполнением панелями ЛДСП. Наружная сторона дверей распашных сплошных и фасады выдвижных ящиков выполнены из гнутого оцинкованного листа, покрытого порошковой краской.

Мойка серии ДМ-4 представляет собой жёсткую каркасную конструкцию из гнутого оцинкованного листа с покрытием полиэфирной порошковой краской. Двери распашные и фасады ящиков выдвижных выполнены из гнутого оцинкованного листа с покрытием полиэфирной порошковой краской с наполнением из базальтовых матов.

Окончательное наполнение и конструктивное исполнение мойки определяет заказчик из ассортимента в соответствии с артикулом варианта исполнения мойки, формируемого согласно приложению Б.

Мойка является неинвазивным медицинским изделием и не контактирует с телом человека.

Перечень документов, на которые даны ссылки данным руководстве по эксплуатации, приведен в Приложении А.

Принцип формирования артикулов для конкретизированного заказа мойки приведен в Приложении Б.

Материалы, используемые при изготовлении моек одной серии, и обозначение серии для формирования артикула конкретизированного заказа приведены в Приложении В.

Внешний вид вариантов исполнения мойки приведен в Приложении Г.

Список вариантов исполнения мойки приведен в Приложении Д.

Технические рисунки смесителей, доступных к выбору при заказе приведены в приложении Е.

Расшифровка символов приведена в Приложении Ж.

Для записи обозначения мойки при заказе и/или в документации указывают название изделия, артикул, сформированный согласно Приложению Б, вид смесителя.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики

1.1.1 Внешний вид мойки приведен в Приложении Г, корпус изготавливается серого, белого или стального цвета; дверь распашная и/или фасад ящика выдвижного изготавливаются белого, оранжевого, зеленого, синего или голубого цвета.

1.1.2 Функциональные размеры мойки приведены ниже. Допустимое отклонение линейных размеров ± 4 мм, допустимое отклонение в высоте отделений ± 15 мм.

Мойка артикулов ДМ-1-111-01, ДМ-2-111-01

Размер столешницы по ширине и длине 600 мм x 600 мм- 1 шт;

Размер раковины Ш x Д x Г 400 мм x 400 мм x 250 мм- 1 шт;

Дверь распашная по ширине и высоте 521 мм x 660 мм- 1 шт;

Мойка артикулов ДМ-1-111-02 и ДМ-1-111-05, ДМ-2-111-02 и ДМ-2-111-05

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм x 600 мм- 1 шт;

Размер раковины Ш x Д x Г 400 мм x 400 мм x 250 мм - 1 шт;

Полка по ширине и длине 310 мм x 470 мм- 1 шт;

Высота отделения над полкой 330 мм;

Высота отделения под полкой 330 мм;

Дверь распашная по ширине и высоте 308 мм x 660 мм- 1 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм x 660 мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-1-111-03 и ДМ-1-111-06, ДМ-2-111-03 и ДМ-2-111-06

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм x 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш x Д x Г 400 мм x 400 мм x 250 мм - 1 шт.;

Размер ящика выдвижного изнутри Ш x Г x В 281 мм x 430 мм x 102 мм –
1 шт.;

Полка по ширине и длине 310 мм x 470 мм - 1 шт.;

Высота отделения над полкой 250 мм;

Высота отделения под полкой 250 мм;

Дверь распашная по ширине и высоте 308 мм х 494 мм- 1 шт.;
Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 660 мм- 1 шт.;
Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 308 мм х 163 мм- 1 шт.

Мойка артикулов ДМ-1-111-04 и ДМ-1-111-07, ДМ-2-111-04 и ДМ-2-111-07

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм - 1 шт.;
Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм. - 1 шт.;
Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 660 мм- 1 шт.;
Размер ящика выдвижного изнутри Ш х Г х В: 281 мм х 430 мм х 134 мм –
3 шт.;
Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 308 мм х 218 мм- 3 шт.

Мойка артикула ДМ-1-111-08, ДМ-2-111-08

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм- 1 шт.;
Размер раковины по ширине, длине и глубине (далее Ш х Д х Г) 370 мм х
370 мм х 250 мм. – 2 шт.;
Дверь распашная по ширине и высоте 408 мм х 660 мм- 2 шт.;

Мойка артикулов ДМ-1-111-09 и ДМ-1-111-12, ДМ-2-111-09 и ДМ-2-111-12

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;
Размер раковины по ширине, длине и глубине (далее Ш х Д х Г) 400 мм х
400 мм х 250 мм. – 1 шт.;
Размер полки по ширине и длине 400 мм х 470 мм – 1 шт.;
Размер полки по ширине и длине 494 мм х 470 мм – 1 шт.;
Высота отделения над полкой 330 мм;
Высота отделения под полкой 330 мм;
Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 660 мм- 2 шт.;
Дверь распашная по ширине и высоте 396 мм х 660 мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-1-111-10 и ДМ-1-111-13, ДМ-2-111-10 и ДМ-2-111-13

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;
Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;

Полка по ширине и длине 494 мм х 470 мм - 1 шт.;
Высота отделения над полкой 330 мм;
Высота отделения под полкой 330 мм;
Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 660 мм- 2 шт.;
Размер ящика выдвижного изнутри Ш х Г х В: 369 мм х 430 мм х 134 мм –
3 шт.;
Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 396 мм х 218 мм- 3 шт.

Мойка артикулов ДМ-1-111-11 и ДМ-1-111-14, ДМ-2-111-11 и ДМ-2-111-14

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;
Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;
Полка по ширине и длине 494 мм х 470 мм- 1 шт.;
Высота отделения над полкой 330 мм;
Высота отделения под полкой 330 мм;
Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 660мм- 2 шт.;
Размер ящика выдвижного изнутри Ш х Г х В: 369 мм х 430 мм х 102 мм –
4 шт.;
Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 396 мм х 163 мм- 4 шт.

Мойка артикула ДМ-3-111-01

Размер столешницы по ширине и длине 600 мм х 600 мм- 1 шт.;
Размер раковины по ширине, длине и глубине (далее Ш х Д х Г) 400 мм х
400 мм х 250 мм- 1 шт.;
Дверь распашная по ширине и высоте 521 мм х 688 мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-3-111-02 и ДМ-3-111-05

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм- 1 шт.;
Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;
Полка по ширине и длине 310 мм х 470 мм- 1 шт.;
Высота отделения над полкой 330 мм;
Высота отделения под полкой 330 мм;
Дверь распашная по ширине и высоте 308 мм х 688мм- 1 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 688мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-3-111-03 и ДМ-3-111-06

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;

Размер ящика выдвижного изнутри Ш х Г х В 281 мм х 430 мм х 102 мм –
1 шт.;

Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 308 мм х 170 мм- 1 шт.

Полка по ширине и длине 310 мм х 470 мм - 1 шт.;

Высота отделения над полкой 250 мм;

Высота отделения под полкой 250 мм;

Дверь распашная по ширине и высоте 308 мм х 515 мм- 1 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 688 мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-3-111-04 и ДМ-3-111-07

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм - 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г: 400 мм х 400 мм х 250 мм. - 1 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 688 мм- 1 шт.;

Размер ящика выдвижного изнутри Ш х Г х В: 281 мм х 430 мм х 134 мм –
3 шт.;

Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 308 мм х 227 мм- 3 шт.

Мойка артикула ДМ-3-111-08

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г 370 мм х 370 мм х 250 мм. – 2 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 408 мм х 688 мм- 2 шт.;

Мойка артикулов ДМ-3-111-09 и ДМ-3-111-12

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г: 400 мм х 400 мм х 250 мм. – 1 шт.;

Размер полки по ширине и длине 400 мм х 470 мм – 1шт.;

Размер полки по ширине и длине 494 мм х 470 мм – 1шт.;

Высота отделения над полкой 330 мм;

Высота отделения под полкой 330 мм;

Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 688 мм- 2 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 396 мм х 688 мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-3-111-10 и ДМ-3-111-13

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г: 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;

Полка по ширине и длине 494 мм х 470 мм - 1 шт.;

Высота отделения над полкой 330 мм;

Высота отделения под полкой 330 мм;

Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 688 мм- 2 шт.;

Размер ящика выдвижного изнутри Ш х Г х В: 369 мм х 430 мм х 134 мм –
3 шт.;

Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 396 мм х 227 мм- 3 шт.

Мойка артикулов ДМ-3-111-11 и ДМ-3-111-14

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;

Полка по ширине и длине 494 мм х 470 мм- 1 шт.;

Высота отделения над полкой 330 мм;

Высота отделения под полкой 330 мм;

Дверь распашная по ширине и высоте 484 мм х 688 мм- 2 шт.;

Размер ящика выдвижного изнутри Ш х Г х В: 369 мм х 430 мм х 102 мм –
4 шт.;

Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 396 мм х 170 мм- 4 шт.

Мойка артикула ДМ-4-111-01

Размер столешницы по ширине и длине 600 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм- 1 шт.;

Полка по ширине и глубине 534 мм х 445 мм- 1 шт.

Дверь распашная по ширине и высоте 569 мм х 668 мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-4-111-02 и ДМ-4-111-05

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;

Полка по ширине и глубине 834 мм х 445 мм- 1 шт.

Дверь распашная по высоте и ширине 668 мм х 433мм- 2 шт.

Мойка артикула ДМ-4-111-08

Размер столешницы по ширине и длине 900 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины на уровне верха перегородки Ш х Д х Г 365 мм х 370 мм х 195 мм. – 2 шт.;

Полка по ширине и глубине 834 мм х 445 мм- 1 шт.

Дверь распашная по ширине и высоте 433 мм х 668 мм- 2 шт.;

Мойка артикулов ДМ-4-111-09 и ДМ-4-111-12

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм. – 1 шт.;

Размер полки по ширине и длине 912 мм х 509 мм – 1 шт.;

Высота отделения над и под полкой 306 мм;

Дверь распашная по ширине и высоте 469 мм х 668 мм- 2 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 527 мм х 668 мм- 1 шт.;

Мойка артикулов ДМ-4-111-10 и ДМ-4-111-13

Размер столешницы по ширине и длине 1500 мм х 600 мм- 1 шт.;

Размер раковины Ш х Д х Г 400 мм х 400 мм х 250 мм - 1 шт.;

Дверь распашная по ширине и высоте 526 мм х 669 мм- 2 шт.;

Объем ящика выдвижного Ш х Г х В: 348 мм х 474 мм х 79 мм – 3 шт.;

Полка по ширине и длине 500 мм х 509 мм - 1 шт.;

Высота отделения над и под полкой 307 мм;

Фасад ящика выдвижного по ширине и высоте 410 мм х 221 мм- 3 шт.

Высота столешницы от пола у всех артикулов составляет 850 мм.

Размеры смесителя не менее, указанных на рисунке Е1, Е2 или Е3 приложения Е.

1.1.3 Габаритные размеры и масса мойки в сборе приведены в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Габаритные размеры мойки, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса мойки, кг, ± 10%
ДМ-1-111-01	600 x 600 x 920	46,7
ДМ-1-111-02	900 x 600 x 920	65,5
ДМ-1-111-03		69,2
ДМ-1-111-04		74,6
ДМ-1-111-05		65,3
ДМ-1-111-06		69,4
ДМ-1-111-07		74,8
ДМ-1-111-08		68,7
ДМ-1-111-09	1500 x 600 x 920	105,3
ДМ-1-111-10		115,6
ДМ-1-111-11		118,6
ДМ-1-111-12		108,3
ДМ-1-111-13		118,6
ДМ-1-111-14		121,6
ДМ-2-111-01	600 x 600 x 920	41,3
ДМ-2-111-02	900 x 600 x 920	63,7
ДМ-2-111-03		67,1
ДМ-2-111-04		73,7
ДМ-2-111-05		63,5
ДМ-2-111-06		67,3
ДМ-2-111-07		73,9
ДМ-2-111-08		68
ДМ-2-111-09	1500 x 600 x 920	100,4
ДМ-2-111-10		111,9
ДМ-2-111-11		114,7
ДМ-2-111-12		103,4
ДМ-2-111-13		114,9
ДМ-2-111-14		117,7
ДМ-3-111-01	600 x 600 x 920	25,4
ДМ-3-111-02	900 x x600 x 920	39,5
ДМ-3-111-03		43,1
ДМ-3-111-04		49,8
ДМ-3-111-05		39,5

Артикул	Габаритные размеры мойки, мм, (Ш*Г*В), ± 4 мм	Масса мойки, кг, ± 10%
ДМ-3-111-06	1500 x 600 x 920	43,1
ДМ-3-111-07		49,8
ДМ-3-111-08		33,8
ДМ-3-111-09		62,3
ДМ-3-111-10		73,8
ДМ-3-111-11		76,6
ДМ-3-111-12		62,3
ДМ-3-111-13		73,8
ДМ-3-111-14		76,6
ДМ-4-111-01	600 x 600 x 920	48
ДМ-4-111-02	900 x 600 x 920	73
ДМ-4-111-05		64
ДМ-4-111-08		65
ДМ-4-111-09		101
ДМ-4-111-10		110
ДМ-4-111-12		101
ДМ-4-111-13		108,5

1.1.4 Столешница выдерживает предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку ($60,0 \pm 1,0$) кг.

1.1.5 Полка и дно ящика выдвижного выдерживают предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку ($15 \pm 1,0$) кг.

1.1.6 Мойка выдерживает совокупную предельную рабочую нагрузку с учетом предельной равномерно распределенной нагрузки на каждую полку и на дно ящика выдвижного, указанную в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Предельная рабочая равномерная распределенная нагрузка, не более, кг
ДМ-1-111-01, ДМ-2-111-01, ДМ-3-111-01	75
ДМ-1-111-02, ДМ-2-111-02, ДМ-3-111-02	90
ДМ-1-111-03, ДМ-2-111-03, ДМ-3-111-03	105
ДМ-1-111-04, ДМ-2-111-04, ДМ-3-111-04	105
ДМ-1-111-05, ДМ-2-111-05, ДМ-3-111-05	90
ДМ-1-111-06, ДМ-2-111-06, ДМ-3-111-06	105
ДМ-1-111-07, ДМ-2-111-07, ДМ-3-111-07	105

Артикул	Предельная рабочая равномерная распределенная нагрузка, не более, кг
ДМ-1-111-08, ДМ-2-111-08, ДМ-3-111-08	75
ДМ-1-111-09, ДМ-2-111-09, ДМ-3-111-09	135
ДМ-1-111-10, ДМ-2-111-10, ДМ-3-111-10	150
ДМ-1-111-11, ДМ-2-111-11, ДМ-3-111-11	165
ДМ-1-111-12, ДМ-2-111-12, ДМ-3-111-12	135
ДМ-1-111-13, ДМ-2-111-13, ДМ-3-111-13	150
ДМ-1-111-14, ДМ-2-111-14, ДМ-3-111-14	165
ДМ-4-111-01	75
ДМ-4-111-02	75
ДМ-4-111-05	75
ДМ-4-111-08	75
ДМ-4-111-09	90
ДМ-4-111-10	150
ДМ-4-111-12	90
ДМ-4-111-13	150

1.1.7 Мойки установлены на неподвижные опоры регулируемые. Опоры мойки обеспечивают устойчивость на твердой поверхности.

1.1.8 Зазоры в проемах дверей на сторону составляют не более 4,0 мм. Зазоры в проемах между фасадом ящика выдвижного и проемом корпуса ящика выдвижного не превышают 4,0 мм.

1.1.9 Ящики выдвижные выдвигаются по направляющим частичного выдвижения и имеют механизм фиксации, предотвращающий их выпадение из корпуса при выдвижении.

1.1.10 Усилие выдвигания ящика выдвижного без нагрузки составляет не более 25 Н (2,5 кгс).

1.1.11 Двери и ящики имеют механизм фиксации, предотвращающий их самопроизвольное открывание.

1.1.12 Двери установлены на петли, обеспечивающие их плавное, без перекосов, открывание и закрывание с усилием не более 20 Н (2 кгс).

1.1.13 Конструкция моек обеспечивает уклон дна чаши к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск.

1.1.14Цвет лакокрасочных покрытий моек, изготовленных по одному заказу, должен быть одного цветового ряда.

1.1.15Наружные поверхности мойки и внутренние поверхности ящика выдвижного устойчивы к многократной дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

1.1.16Средний срок службы мойки до списания составляет не менее 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы мойки.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

Сведения о материалах и покупных изделиях

1.1.17Опора регулируемая изготовлена из пластика с резьбовым металлическим стержнем. Диапазон регулировки опоры регулируемой составляет не менее 10 мм.

1.1.18Смеситель изготовлен одного из трех видов, доступных к выбору при заказе: «смеситель стандартный», «смеситель локтевой» и «смеситель с высоким изливом». Размеры смесителя (не менее) приведены в Приложении Е на рисунках Е1, Е2 и Е3. Смеситель изготовлен из стали хромированной.

Смеситель укомплектован гибкой подводкой диаметром 1/2", длиной не менее 340мм.

1.1.19Сифон укомплектован гибкой гофрированной трубой диаметром 40/50 мм и длиной не менее 500 мм.

1.1.20Мойка изготовлена из материалов в соответствии с Приложением В. Материалы мойки имеют обозначения, отображаемые в артикуле мойки в соответствии с Приложением Б.

Сливной выпуск мойки изготовлен из полипропилена.

Комплектность

1.1.21 В комплект поставки мойки входят:

1 Мойка одного артикула в соответствии с Приложением Б	1 шт.;
2 Руководство по эксплуатации ДМ.32924160.013.РЭ	- 1 шт.;
3 Смеситель	от 1 до 2 шт. (при необходимости);
4 Гибкая подводка	от 2 до 4 шт. (при необходимости);
5 Сифон	от 1 до 2 шт. (при необходимости);
6 Гибкая гофрированная труба	от 1 до 2 шт. (при необходимости).

1.1.22 При заказе мойки необходимо указывать название изделия, артикул, сформированный согласно приложению Б, цвет корпуса и двери распашной и/или фасадов выдвижных ящиков, обозначение смесителя.

1.1.23 Мойка по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде. Сборка мойки должна осуществляться только представителями предприятия-изготовителя.

Упаковка

1.1.24 Перед упаковкой металлические части мойки подвергаются обезжириванию и консервированию по группе II-1 ГОСТ 9.014 для условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

1.1.25 Потребительская упаковка представляет собой ящик из гофрированного картона, оклеенный клейкой лентой. Фасадные части мойки укрываются воздушно-пузырчатой плёнкой из полиэтилена, мойка оборачивается стрейч-плёнкой из полиэтилена, на углах устанавливаются уголки из полиуретана либо трубка из пенополиэтилена, затем мойка должна укладываться в ящик. Изнутри ящик должен быть выложен упаковочной бумагой или гофрированным картоном для предотвращения самопроизвольного перемещения мойки внутри упаковки при транспортировании.

1.1.26 Не установленные на мойку детали (механизмы, крепеж и пр.), а также эксплуатационная и товаросопроводительная документация упаковываются в полиэтиленовый пакет, а затем помещаются в потребительскую упаковку вместе с мойкой.

1.1.27 Для транспортирования мойки в потребительских упаковках помещают в деревянный ящик, выложенный внутри упаковочной бумагой или древесноволокнистой плитой. Для фиксации может быть использован шпагат и уголки.

1.1.28 Мойка может транспортироваться в контейнерах в упаковке ВУ-1 по ГОСТ 9.014.

1.1.29 В транспортную упаковку вложен упаковочный лист, на котором указано:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование мойки;
- количество мест;
- условные номера упаковщика и контролера;
- дата упаковывания.

2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование мойки должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

2.1.1 Размещение и крепление упаковок с мойкой в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

2.1.2 Транспортирование мойки крытыми транспортными средствами должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от минус 50 до плюс 50 °С;

Относительная влажность до 100 % при температуре плюс 25 °С.

Мойка должна храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

Хранение мойки должно осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 5 до плюс 40 °С;

Относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2.1.3 Хранение мойки в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мойка предназначена для эксплуатации внутри помещений в условиях специализированных медицинских помещений с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20 (например: помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), палата (блок) реанимации и интенсивной терапии, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, операционная, малая операционная, реанимационная и т.д. а также может применяться в лабораториях), в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

Поверхности мойки не предназначены для контакта с телом человека для достижения заявленной эффективности в рамках установленного производителем специфического медицинского назначения.

Эксплуатация мойки должна осуществляться при следующих климатических условиях:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С;

Относительная влажность до 80 % при плюс 25°С.

Меры предосторожности при применении мойки:

Мойка предназначена для применения в специализированных медицинских помещениях с классом чистоты А и Б по СП 2.1.3678-20, при обращении с мойкой необходимо пользоваться защитными медицинскими перчатками.

Мойка должна быть использована только по прямому назначению.

Мойка должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности с перепадом высот не более 10 мм.

Предельная максимальная равномерная нагрузка на горизонтальные поверхности мойки не должна превышать для каждой из поверхностей значений, указанных в п.п. 1.1.4-1.1.5.

Предельная максимальная равномерная нагрузка на мойку не должна превышать значений, указанных в п. 1.1.6.

Запрещается неравномерное нагружение полок и ящика выдвижного.

Запрещается вставать и/или садиться на мойку.

Запрещается использовать мойку, если имеются механические повреждения таких частей мойки, как регулируемые опоры, направляющие ящика выдвижного, петли дверей, механизмы фиксации ящика выдвижного и дверей.

При задвигании ящика выдвижного и закрывании двери необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук.

При попадании на горизонтальные поверхности мойки воды (за исключением поверхностей раковины) следует насухо вытереть влажные поверхности.

Меры предосторожности при обнаружении неисправностей

При обнаружении в ходе назначенного применения неисправностей (например, при возникновении потрескивания горизонтальных поверхностей или регулируемых опор) и/или механических повреждений частей мойки, способных снизить устойчивость мойки к нагружению, способных вызвать нарушение устойчивости мойки, падение или опрокидывание, необходимо освободить мойку от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При обнаружении протечек, нарушений герметичности частей мойки, подключенных к водопроводу и канализации, необходимо незамедлительно отключить мойку от водоснабжения, освободить мойку от нагрузки и обратиться к предприятию-изготовителю.

При возникновении вопросов, связанных с безопасным применением мойки, необходимо обращаться к предприятию-изготовителю.

Порядок установки мойки:

Мойка по желанию заказчика может поставляться в собранном и разобранном виде. Сборка мойки и подключение к водоснабжению и канализации осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка мойки

Перед применением мойки ее поверхности должны быть подвергнуты предварительной дезинфекции и высушены.

Уход за мойкой заключается в ежедневной влажной уборке с использованием мягких салфеток или ткани и неагрессивных, не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

При ежедневной влажной уборке рекомендуется использовать 0,5 % раствор моющего средства по ГОСТ 25644.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать чистящие средства, которые содержат абразивы, хлор, кислоты и соду.

После окончания уборки мойку следует насухо протереть.

Дезинфекция мойки

Дезинфекцию наружных поверхностей мойки проводят путем однократного протирания поверхностей мойки 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644.

Дезинфекцию мойки следует проводить перед применением, а также в случае загрязнения поверхностей мойки биологическими жидкостями и потенциально контаминированными веществами.

Мойка является нестерильной и не предназначена для стерилизации.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание смесителя, подключенных к водопроводу и канализации частей мойки осуществляется только представителями предприятия-изготовителя.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Мойка подлежит утилизации в соответствии с действующими на момент утилизации правилами и требованиями, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

Мойка, не имевшая контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически безопасным медицинским отходам и должна утилизироваться совместно с твердыми коммунальными отходами.

Мойка, имевшая контакт с биологическими жидкостями, относится к эпидемиологически опасным медицинским отходам класса Б по СанПиН 2.1.3684-21 и перед утилизацией должна быть подвергнута обеззараживанию. После соответствующего обеззараживания мойка может быть утилизирована совместно с твердыми коммунальными отходами.

**6 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗДЕЛИЕ**

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.
Общие технические условия»;

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мойки требованиям ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения и соблюдении мер предосторожности.

При нарушении мер предосторожности, условий эксплуатации, транспортирования и хранения потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание.

Гарантийный срок эксплуатации мойки должен составлять 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения мойки должен составлять 5 лет.

Средний срок службы мойки до списания должен составлять не менее 8 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы мойки.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-
складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества мойки, отправлять по адресу:
info@doctormebel.ru

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-
складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества мойки, отправлять по адресу:
info@doctormebel.ru

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-
складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества мойки, отправлять по адресу:
info@doctormebel.ru

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Юридический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

Адрес производства:

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-
складская зона, строение № 82.

Рекламации, касающиеся качества мойки, отправлять по адресу:
info@doctormebel.ru

9 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Сервисное обслуживание и ремонт мойки осуществляется по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Мебель»
(ООО «Доктор Мебель»)

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),
домовладение 4, строение 4, офис 511/1Д.

Контактные данные:

Телефоны:

+7 (495) 134-00-22

Сайт:

www.doctormebel.ru

Электронная почта:

info@doctormebel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данном
руководстве по эксплуатации

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
МУ-287-113 от 30 декабря 1998 года	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Принцип формирования артикула для конкретизированного заказа

Артикул варианта исполнения мойки формируется в виде:

серия-111-XX,

где:

серия - обозначает материалы мойки в соответствии с Приложением В
Таблицей В.1, Таблицей В.2 и Таблицей В.3.

XX – признак конструктивного решения мойки по внешнему виду в соответствии с Приложением Г и функциональными размерами в соответствии со значениями, указанными в п. 1.1.2.

Кх – признак цвета корпуса:

Номер обозначения цвета корпуса в соответствии с Таблицей Б.1;

Фх – признак цвета фасада ящика выдвижного и/или цвет двери.

Номер обозначения цвета фасада ящика выдвижного и/или цвет двери в соответствии с Таблицей Б.1.

При отсутствии возможности реализации какой-либо комплектации в артикул буква признака не добавляется.

Таблица Б.1 – Таблица идентификации сокращений обозначений цвета корпуса, цвета фасада ящика выдвижного и цвет двери

Признак	Значение признака	Аббревиатура обозначения в артикуле
Цвет корпуса	Белый	К1
	Серый	К2
Цвет фасада ящика выдвижного и/или цвет двери	Зелёный	Ф1
	Оранжевый	Ф2
	Голубой	Ф3
	Синий	Ф4
	Белый	Ф5

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Используемые при изготовлении мойки материалы и их краткие обозначения
для формирования артикула

Таблица В.1 – Таблица идентификации материалов мойки серии ДМ-1
для формирования артикула

Материалы мойки
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика;
Корпус и полки: Панели ЛДСП 16мм (плиты древесно-стружечные ламинированные, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров, тип P5, класс эмиссии формальдегида E1);
Фасад распашных глухих дверей Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты.
Фасад ящика: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением полипропиленом.
Столешница с интегрированной мойкой и бортом: Литьевой мрамор с интегрированной мойкой и бортом. или
Столешница: Декоративно-бумажного слоистого пластика толщиной 16 мм (HPL-HighPressureLaminate);
Мойка: Литьевой мрамор.

Таблица В.2 – Таблица идентификации материалов мойки серии ДМ-2
для формирования артикула

Материалы мойки
Каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием, скреплённый пластиковыми замками из ударопрочного АБС пластика;
Корпус и полки, корпус ящика выдвижного: Панели ЛДСП 16мм (плиты древесно-стружечные ламинированные, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров, тип P5, класс эмиссии формальдегида E1);
Фасад распашных глухих дверей и фасад ящика: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16мм;

Материалы мойки
Столешница: Литьевой мрамор с интегрированной мойкой и бортом; Опоры регулируемые: Опоры регулируемые из пластика с резьбовым металлическим стержнем

Таблица В.3 – Таблица идентификации материалов мойки серии ДМ-3 для формирования артикула

Материалы мойки
Вертикальный несущий каркас: Профиль, прессованный из алюминиевых сплавов 6060 с анодно-окисным покрытием; Корпус и полки, корпус ящика выдвижного: Панели ЛДСП 16мм (плиты древесно-стружечные ламинированные, облицованные пленками на основе термоактивных полимеров, тип Р5, класс эмиссии формальдегида Е1); Фасад распашных глухих дверей и фасад ящика: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с наполнением из плиты ЛДСП 16мм; Столешница с интегрированной мойкой и бортом: Литьевой мрамор с интегрированной мойкой и бортом. Опоры регулируемые: Опоры регулируемые из пластика с резьбовым металлическим стержнем

Таблица В.4 – Таблица идентификации материалов мойки серии ДМ-4 для формирования артикула


Материалы мойки
Каркас и корпус: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс; металлический профиль марки сталь 3 профильным сечением 20x20, 25x25 и 40x20, покрытые порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Фасады ящика выдвижного и глухой двери: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской с шумопоглощающим материалом - базальтовые маты. Полки, дно и корпус ящика: Гнутый оцинкованный лист толщиной 0,8 – 1,5 мм марки 08кп/пс, покрыт порошковой эпоксидно-полиэфирной краской. Столешница с интегрированной мойкой и бортом: Литьевой мрамор с интегрированной мойкой и бортом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Внешний вид мойки

Рисунки определяют внешний вид в одном из возможных цветовых решений для каждой серии мойки, конструктивные особенности заданы отдельно.

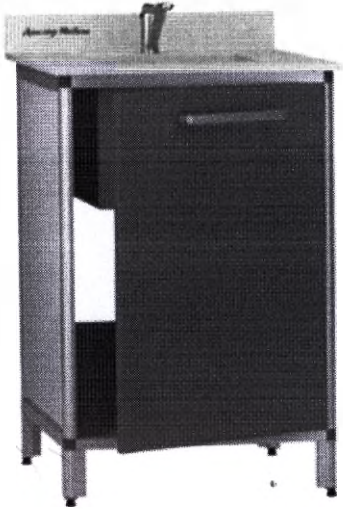
Мойки медицинские серии ДМ-1		
		
ДМ-1-111-01	ДМ-1-111-02	ДМ-1-111-03
		
ДМ-1-111-04	ДМ-1-111-05	ДМ-1-111-06




ДМ-1-111-07



ДМ-1-111-08

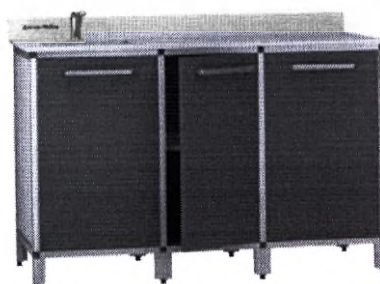

ДМ-1-111-09

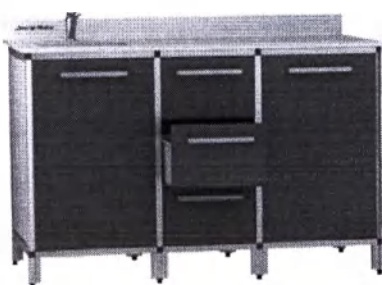

ДМ-1-111-10*



ДМ-1-111-11



ДМ-2-101-12




ДМ-1-111-13



ДМ-1-111-14

Мойки медицинские серии ДМ-2










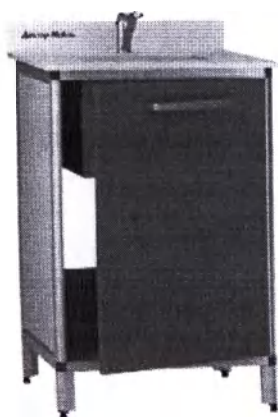


ДМ-2-111-02




ДМ-2-111-03

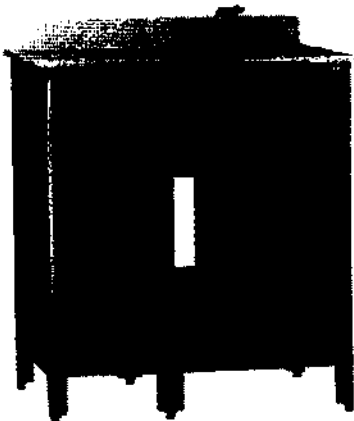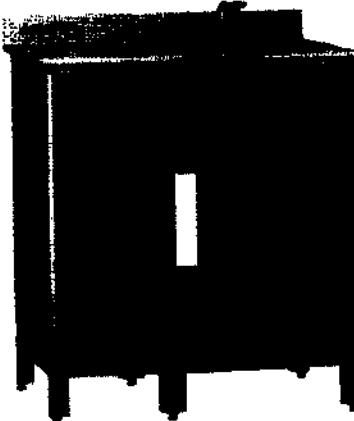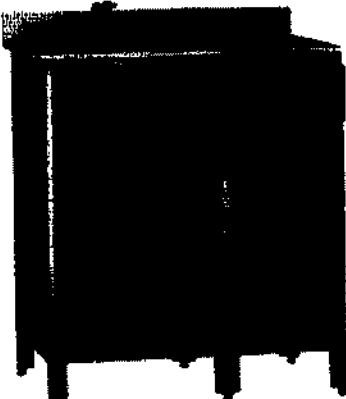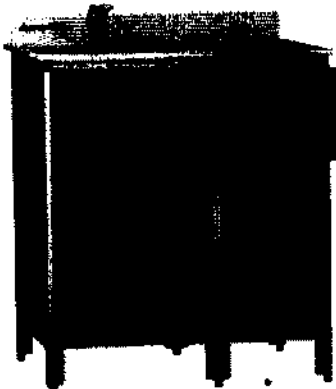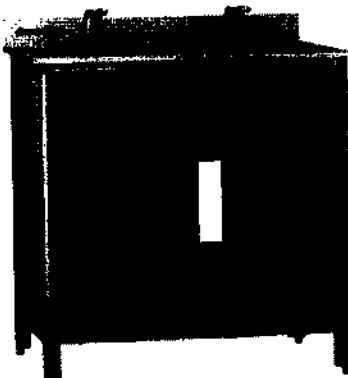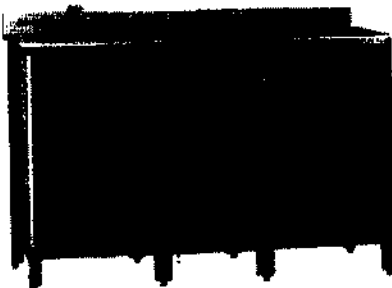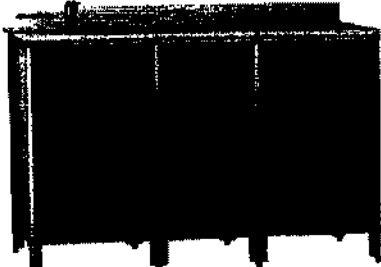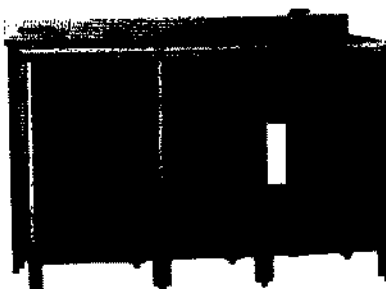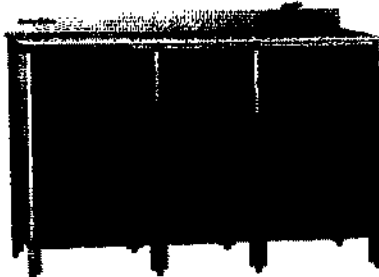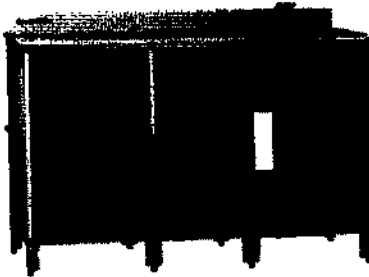


ДМ-2-111-01  ДМ-2-111-04	 ДМ-2-111-05	 ДМ-2-111-06
 ДМ-2-111-07	 ДМ-2-111-08	 ДМ-2-111-09
 ДМ-2-111-10	 ДМ-2-111-11	 ДМ-2-101-12
 ДМ-2-111-13	 ДМ-2-111-14	


Мойки медицинские серии ДМ-3

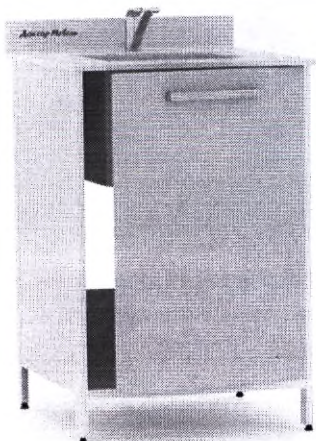


ДМ-3-111-01

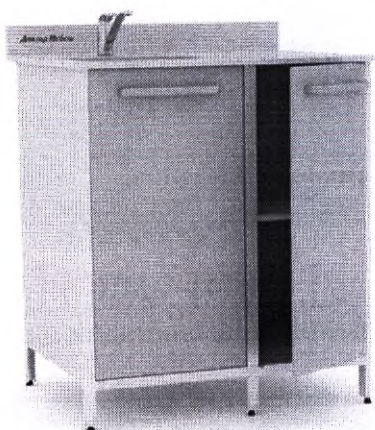


ДМ-3-111-02

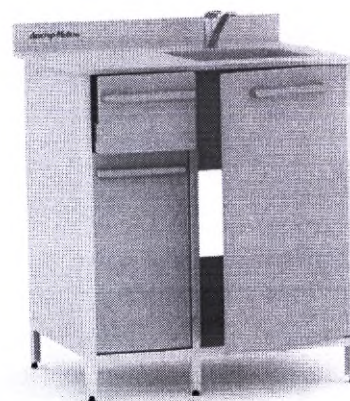

ДМ-3-111-03

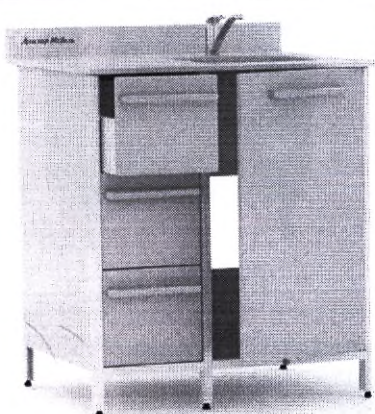


ДМ-3-111-04

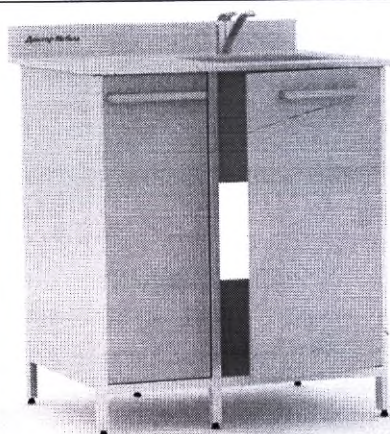


ДМ-3-111-05




ДМ-3-111-06

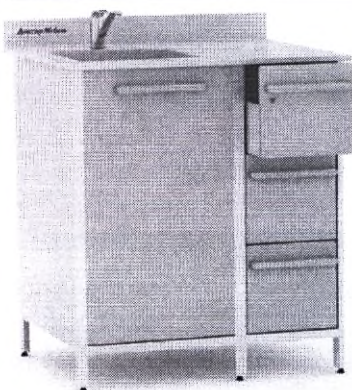


ДМ-3-111-07

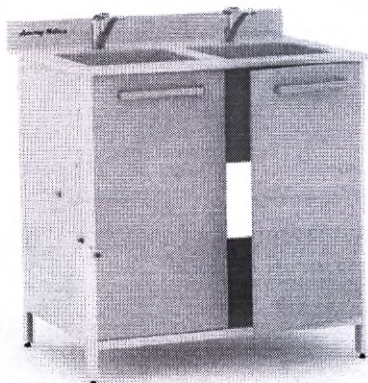


ДМ-3-111-08

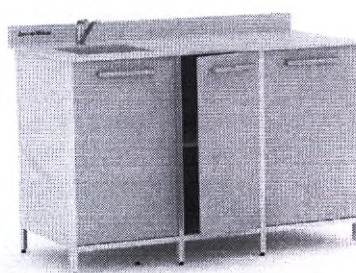


ДМ-3-111-09

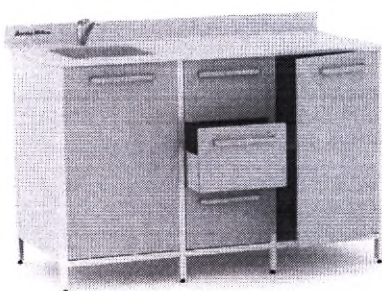


ДМ-3-111-10

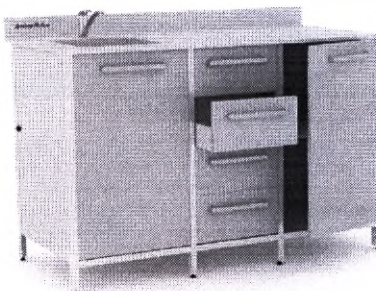

ДМ-3-111-11

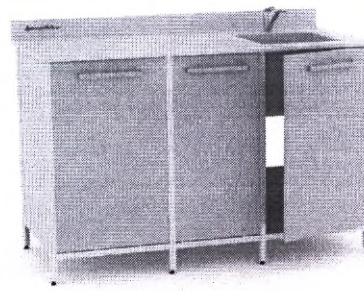

ДМ-3-111-12

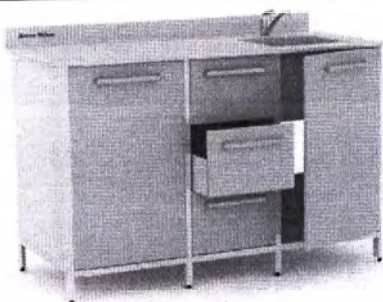

ДМ-3-111-13



ДМ-3-111-14

Мойки медицинские серии ДМ-4



ДМ-4-111-01




ДМ-4-111-02



ДМ-4-111-05




ДМ-4-111-08

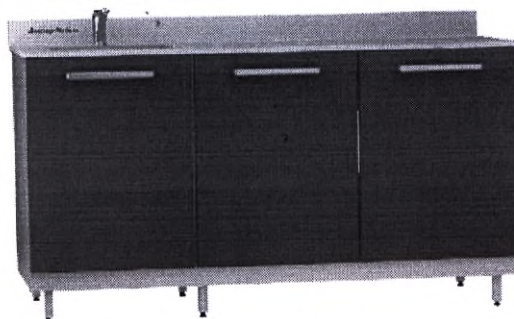

ДМ-4-111-09



ДМ-4-111-10

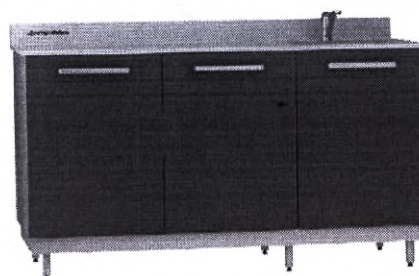

ДМ-4-111-12



ДМ-4-111-13

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Перечень вариантов исполнения мойки

№ п/п	Вариант исполнения	Обозначение документа
1.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-01.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.1
2.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-01.К1.Ф5	
3.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-01.К2.Ф1	
4.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-01.К2.Ф5	
5.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-02.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.2
6.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-02.К1.Ф5	
7.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-02.К2.Ф1	
8.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-02.К2.Ф5	
9.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-03.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.3
10.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-03.К1.Ф5	
11.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-03.К2.Ф1	
12.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-03.К2.Ф5	
13.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-04.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.4
14.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-04.К1.Ф5	
15.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-04.К2.Ф1	
16.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-04.К2.Ф5	
17.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-05.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.5
18.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-05.К1.Ф5	
19.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-05.К2.Ф1	
20.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-05.К2.Ф5	
21.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-06.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.6
22.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-06.К1.Ф5	

23.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-06.К2.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.7
24.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-06.К2.Ф5	
25.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-07.К1.Ф1	
26.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-07.К1.Ф5	
27.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-07.К2.Ф1	
28.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-07.К2.Ф5	
29.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-08.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.8
30.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-08.К1.Ф5	
31.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-08.К2.Ф1	
32.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-08.К2.Ф5	
33.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-09.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.9
34.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-09.К1.Ф5	
35.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-09.К2.Ф1	
36.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-09.К2.Ф5	
37.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-10.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.10
38.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-10.К1.Ф5	
39.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-10.К2.Ф1	
40.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-10.К2.Ф5	
41.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-11.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.11
42.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-11.К1.Ф5	
43.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-11.К2.Ф1	
44.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-11.К2.Ф5	
45.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-12.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.12
46.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-12.К1.Ф5	
47.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-12.К2.Ф1	
48.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-12.К2.Ф5	

49.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-13.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.13
50.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-13.К1.Ф5	
51.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-13.К2.Ф1	
52.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-13.К2.Ф5	
53.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-14.К1.Ф1	ДМ-1.МКМ.32924160.013.14
54.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-14.К1.Ф5	
55.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-14.К2.Ф1	
56.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-1-111-14.К2.Ф5	
57.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-01.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.17
58.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-01.К1.Ф5	
59.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-01.К2.Ф2	
60.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-01.К2.Ф5	
61.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-02.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.18
62.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-02.К1.Ф5	
63.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-02.К2.Ф2	
64.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-02.К2.Ф5	
65.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-03.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.19
66.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-03.К1.Ф5	
67.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-03.К2.Ф2	
68.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-03.К2.Ф5	
69.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-04.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.20
70.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-04.К1.Ф5	
71.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-04.К2.Ф2	
72.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-04.К2.Ф5	
73.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-05.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.21
74.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-05.К1.Ф5	

75.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-05.К2.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.22
76.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-05.К2.Ф5	
77.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-06.К1.Ф2	
78.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-06.К1.Ф5	
79.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-06.К2.Ф2	
80.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-06.К2.Ф5	ДМ-2.МКМ.32924160.013.23
81.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-07.К1.Ф2	
82.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-07.К1.Ф5	
83.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-07.К2.Ф2	
84.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-07.К2.Ф5	
85.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-08.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.24
86.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-08.К1.Ф5	
87.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-08.К2.Ф2	
88.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-08.К2.Ф5	
89.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-09.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.25
90.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-09.К1.Ф5	
91.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-09.К2.Ф2	
92.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-09.К2.Ф5	
93.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-10.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.26
94.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-10.К1.Ф5	
95.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-10.К2.Ф2	
96.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-10.К2.Ф5	
97.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-11.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.27
98.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-11.К1.Ф5	
99.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-11.К2.Ф2	
100.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-11.К2.Ф5	

101.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-12.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.28
102.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-12.К1.Ф5	
103.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-12.К2.Ф2	
104.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-12.К2.Ф5	
105.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-13.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.29
106.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-13.К1.Ф5	
107.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-13.К2.Ф2	
108.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-13.К2.Ф5	
109.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-14.К1.Ф2	ДМ-2.МКМ.32924160.013.30
110.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-14.К1.Ф5	
111.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-14.К2.Ф2	
112.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-2-111-14.К2.Ф5	
113.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-01.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.33
114.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-01.К1.Ф5	
115.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-01.К2.Ф3	
116.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-01.К2.Ф5	
117.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-02.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.34
118.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-02.К1.Ф5	
119.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-02.К2.Ф3	
120.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-02.К2.Ф5	
121.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-03.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.35
122.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-03.К1.Ф5	
123.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-03.К2.Ф3	
124.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-03.К2.Ф5	
125.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-04.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.36
126.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-04.К1.Ф5	

127.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-04.К2.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.37
128.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-04.К2.Ф5	
129.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К1.Ф3	
130.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К1.Ф5	
131.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К2.Ф3	
132.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К2.Ф5	ДМ-3.МКМ.32924160.013.38
133.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К1.Ф3	
134.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К1.Ф5	
135.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К2.Ф3	
136.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К2.Ф5	
137.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.39
138.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К1.Ф5	
139.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К2.Ф3	
140.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К2.Ф5	
141.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.40
142.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К1.Ф5	
143.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К2.Ф3	
144.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К2.Ф5	
145.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.41
146.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К1.Ф5	
147.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К2.Ф3	
148.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К2.Ф5	
149.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.42
150.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К1.Ф5	
151.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К2.Ф3	
152.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К2.Ф5	

127.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-04.К2.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.37
128.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-04.К2.Ф5	
129.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К1.Ф3	
130.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К1.Ф5	
131.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К2.Ф3	
132.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-05.К2.Ф5	ДМ-3.МКМ.32924160.013.38
133.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К1.Ф3	
134.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К1.Ф5	
135.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К2.Ф3	
136.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-06.К2.Ф5	
137.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.39
138.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К1.Ф5	
139.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К2.Ф3	
140.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-07.К2.Ф5	
141.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.40
142.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К1.Ф5	
143.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К2.Ф3	
144.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-08.К2.Ф5	
145.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.41
146.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К1.Ф5	
147.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К2.Ф3	
148.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-09.К2.Ф5	
149.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.42
150.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К1.Ф5	
151.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К2.Ф3	
152.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-10.К2.Ф5	

153.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-11.К1.Ф3	ДМ-3.МКМ.32924160.013.43
154.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-11.К1.Ф5	ДМ-3.МКМ.32924160.013.44
155.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-11.К2.Ф3	
156.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-11.К2.Ф5	
157.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-12.К1.Ф3	
158.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-12.К1.Ф5	ДМ-3.МКМ.32924160.013.45
159.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-12.К2.Ф3	
160.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-12.К2.Ф5	
161.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-13.К1.Ф3	
162.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-13.К1.Ф5	ДМ-3.МКМ.32924160.013.46
163.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-13.К2.Ф3	
164.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-13.К2.Ф5	
165.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-14.К1.Ф3	
166.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-14.К1.Ф5	ДМ-4.МКМ.32924160.013.48
167.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-14.К2.Ф3	
168.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-3-111-14.К2.Ф5	
169.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-01.К1.Ф4	
170.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-01.К1.Ф5	ДМ-4.МКМ.32924160.013.49
171.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-01.К2.Ф4	
172.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-01.К2.Ф5	
173.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-02.К1.Ф4	
174.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-02.К1.Ф5	ДМ-4.МКМ.32924160.013.50
175.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-02.К2.Ф4	
176.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-02.К2.Ф5	
177.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-05.К1.Ф4	
178.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-05.К1.Ф5	

179.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-05.К2.Ф4	ДМ-4.МКМ.32924160.013.51
180.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-05.К2.Ф5	
181.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-08.К1.Ф4	
182.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-08.К1.Ф5	
183.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-08.К2.Ф4	
184.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-08.К2.Ф5	ДМ-4.МКМ.32924160.013.52
185.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-09.К1.Ф4	
186.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-09.К1.Ф5	
187.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-09.К2.Ф4	
188.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-09.К2.Ф5	
189.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-10.К1.Ф4	ДМ-4.МКМ.32924160.013.53
190.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-10.К1.Ф5	
191.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-10.К2.Ф4	
192.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-10.К2.Ф5	
193.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-12.К1.Ф4	ДМ-4.МКМ.32924160.013.54
194.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-12.К1.Ф5	
195.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-12.К2.Ф4	
196.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-12.К2.Ф5	
197.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-13.К1.Ф4	ДМ-4.МКМ.32924160.013.55
198.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-13.К1.Ф5	
199.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-13.К2.Ф4	
200.	Мойка медицинская по ТУ 32.50.30-013-32924160-2021 ДМ-4-111-13.К2.Ф5	

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Технические рисунки

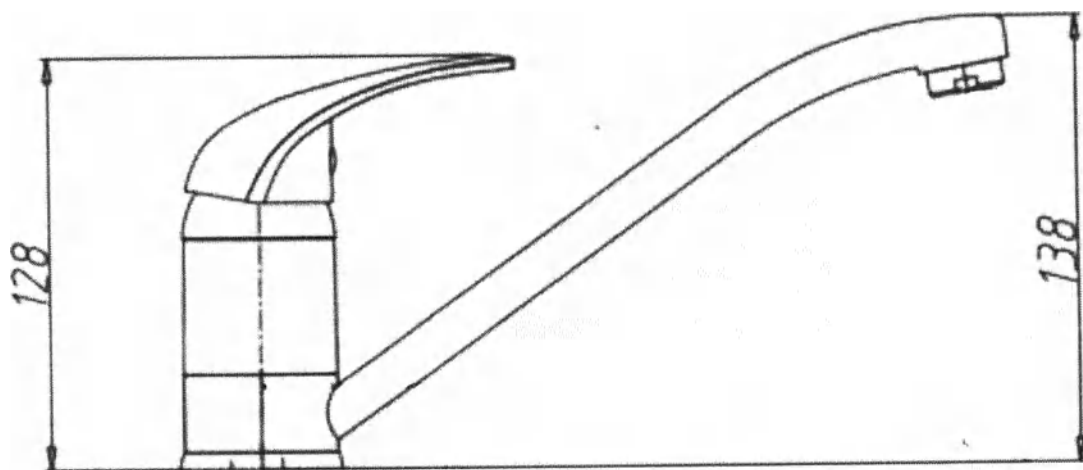


Рисунок Е1 – Технический рисунок смесителя вида «смеситель стандартный», доступного к выбору при заказе.

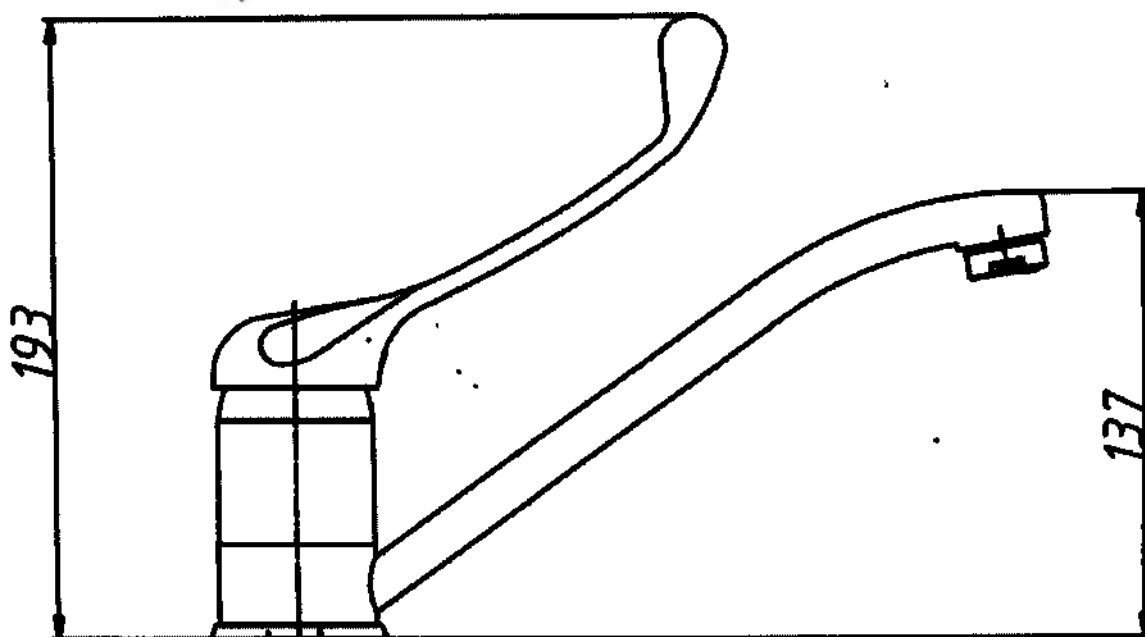


Рисунок Е2 – Технический рисунок смесителя вида «смеситель локтевой», доступного к выбору при заказе

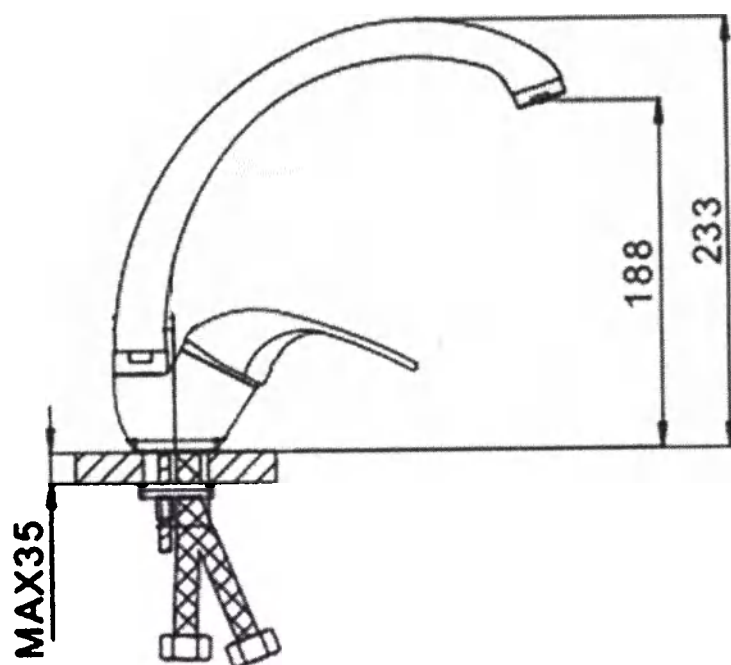


Рисунок Е3 – Технический рисунок смесителя вида «смеситель с высоким
изливом», доступного к выбору при заказе

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Символы, применяемые в маркировке

Символ	Обозначение
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Верх
	Знак соответствия при добровольной сертификации

Проп..., пронумеровано и
скре... по печатью
147 ... док ссм ... листа(ов)
Ген... льный директор
ОС... Доктор Мебель»
Ян... ов Ю.В.

