



ДАРЛИН
МЕДИЦИНСКАЯ
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

**Общество с ограниченной
ответственностью «Дарлин»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Дарлин»



Сорокин П. И.

«28» апреля 2022 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

**Комплект одноразовой медицинской одежды из нетканых
материалов не стерильный по ТУ 14.19.32-003-67798088-2020**

Версия. 1.1

Оглавление

1. Описание изделия	3
2. Комплект поставки	3
3. Описание и технические характеристики	5
4. Порядок применения	16
5. Маркировка	18
6. Транспортировка, хранение и эксплуатация	19
7. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.....	19
8. Утилизация	19
9. Гарантия.....	19
10. Сведения об изготовителе.....	19
Приложение 1	20
Приложение 2.....	22

1. Описание изделия

Комплект одноразовой медицинской одежды из нетканых материалов не стерильный по ТУ 14.19.32-003-67798088-2020 (далее – комплект, одежда, изделие), предназначенный для защиты медицинских работников от инфицирования при организации и проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе: при оказании медицинской помощи пациентам, выполнении лабораторных исследований и дезинфекционных работ.

Комплекты выпускаются в следующих вариантах комплектаций: см. приложение 1.

Защитные функции изделия обусловлены: барьерными свойствами материала, из которого изготовлен комплект и его конструктивными особенностями.

Область применения: применяются в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях.

Информация о пользователях: медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений широкого профиля.

Комплект предназначен для одноразового использования.

Комплект выпускается нестерильным. Изделие перед применением не требует стерилизации.

Изделие соответствует виду климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

По потенциальному риску применения изделия относятся к классу 1 по ГОСТ 31508.

Показание к применению

Обеспечение безопасности медицинских работников при организации и проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе: при оказании медицинской помощи пациентам, выполнении лабораторных исследований и дезинфекционных работ.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, из которых изготовлены изделия.

Побочные эффекты

При индивидуальной непереносимости материалов, возможно развитие аллергической реакции.

2. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Комплект одноразовой медицинской одежды из нетканых материалов не стерильный по ТУ 14.19.32-003-67798088-2020*	1
2	Инструкция по применению	1

*- Комплект выбирается Заказчиком из числа представленных комплектаций:

1. Комплект 1 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70), в составе:

1.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 1 шт.

1.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

1.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.

2. Комплект 2 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70), в составе:

2.1 Комбинезон одноразовый - 1 шт.

2.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

2.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак - 1 шт.

3. Комплект 3 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

3.1 Комбинезон одноразовый - 1 шт.

3.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

4. Комплект 4 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:
- 4.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 1 шт.
 - 4.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.
 - 4.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.
 - 4.4 Комбинезон - 1 шт.
 - 4.5 Наручники - 2 шт.
 - 4.6 Фартук, длина 110 или 140 см - 1 шт.
 - 4.7 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80*80 - 1 шт.
5. Комплект 5 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:
- 5.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 1 шт.
 - 5.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.
 - 5.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.
 - 5.4 Рубашка - 1 шт.
 - 5.5 Брюки - 1 шт.
 - 5.6 Наручники - 2 шт.
 - 5.7 Фартук, длина 110 или 140 см - 1 шт.
 - 5.8 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80*80 - 1 шт.
6. Комплект 6 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:
- 6.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 2 шт.
 - 6.2 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 2 шт.
7. Комплект 7 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:
- 7.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3 - 1 шт.
 - 7.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.
 - 7.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.
8. Комплект 8 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:
- 8.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3 - 1 шт.
 - 8.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.
 - 8.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.
 - 8.4 Комбинезон - 1 шт.
 - 8.5 Наручники - 2 шт.
 - 8.6 Фартук, длина 110 или 140 см - 1 шт.
 - 8.7 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80*80 - 1 шт.
9. Комплект 9 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:
- 9.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3 - 1 шт.
 - 9.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.
 - 9.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.
 - 9.4 Рубашка - 1 шт.
 - 9.5 Брюки - 1 шт.
 - 9.6 Наручники - 2 шт.
 - 9.7 Фартук, длина 110 или 140 см - 1 шт.
 - 9.8 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80*80 - 1 шт.

10. Комплект 10 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

10.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3 - 2шт.

10.2 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем -2шт.

11. Комплект 11 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

11.1 Халат медицинский одноразовый на кнопках - 2шт.

11.2 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем -2шт.

3. Описание и технические характеристики

3.1 Основные параметры

3.1.1 Требования к комбинезону

Общий вид изделия и размеры должны соответствовать рисунку 1 и таблице 1.

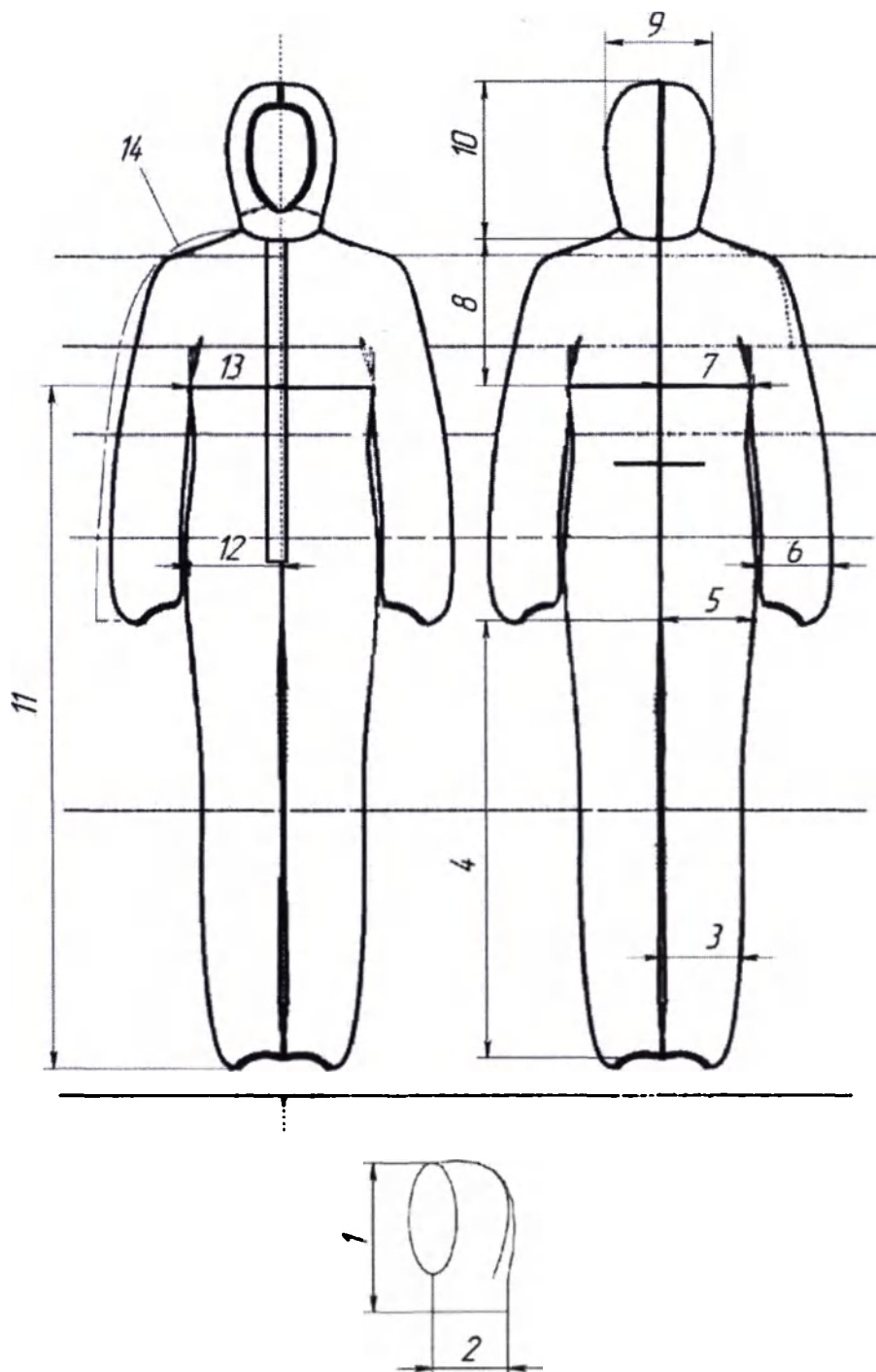


Рисунок 1.

Таблица 1.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см
2	28,0±0,5см	28,0±0,5см	28,5±0,5см	29,0±0,5см	29,0±0,5см	30,0±0,5см	30,0±0,5см	30,0±0,5см
3	25,0±0,5см	26,0±0,5см	28,0±0,5см	30,0±0,5см	30,0±0,5см	31,0±0,5см	31,0±0,5см	31,0±0,5см
4	77,0±1,0см	83,5±1,0см	83,0±1,0см	89,0±1,0см	93,±1,0см	93,±1,0см	95,±1,0см	95,±1,0см
5	41,0±0,5см	42,0±0,5см	44,0±0,5см	48,0±0,5см	51,0±0,5см	51,0±0,5см	51,0±0,5см	51,0±0,5см
6	19,0±0,5см	19,0±0,5см	19,0±0,5см	19,0±0,5см	20,0±0,5см	20,0±0,5см	20,0±0,5см	20,5±0,5см
7	27,0±0,5см	30,0±0,5см	32,0±0,5см	33,0±0,5см	36,0±0,5см	36,0±0,5см	36,0±0,5см	38,0±0,5см
8	30,0±0,5см	38,0±0,5см	38,0±0,5см	38,0±0,5см	39,0±0,5см	39,0±0,5см	40,0±0,5см	40,0±0,5см
9	56,0±0,5см	56,0±0,5см	56,0±0,5см	56,0±0,5см	56,0±0,5см	56,0±0,5см	56,0±0,5см	56,0±0,5см
10	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см	42,0±0,5см
11	117,0±1,0см	138,0±1,0см	138,0±1,0см	140,0±1,0см	142,0±1,0см	144,0±1,0см	144,0±1,0см	145,0±1,0см
12	31,0±0,5см	35,0±0,5см	37,0±0,5см	37,0±0,5см	39,0±0,5см	39,0±0,5см	41,0±0,5см	45,0±0,5см
13	27,0±0,5см	30,0±0,5см	34,0±0,5см	35,0±0,5см	36,0±0,5см	36,0±0,5см	36,0±0,5см	38,0±0,5см
14	79,0±1,0см	89,0±1,0см	89,0±1,0см	89,0±1,0см	91,0±1,0см	91,0±1,0см	91,0±1,0см	91,0±1,0см

3.1.2 Требования к халату на завязках

3.1.2.1 Халат прямого силуэта, с длинными рукавами, с запахом по спинке, длиной 140 см в готовом виде. Перед халата – цельнокроеный со спинками, без боковых швов. Длинный рукав собран на резинке (модели 1, 2, 3, 4) или на трикотажной манжете 5см (модели 5, 6, 7, 8). По среднему срезу спинок на линии талии закреплены две отлетные завязки пояса (модели 1, 2, 5, 6), либо для обеспечения «стерильной спины» пришиты дополнительно две завязки: одна на внутренней стороне полочки, другая на противоположной полочке снаружи (модели 3, 4, 7, 8). Горловина обработана окантовкой с завязками (модели 1, 3, 5, 7) или на липучке (модели 2, 4, 6, 8).

3.1.2.2 Общий вид и размеры халата на завязках должны соответствовать рисунку 2 и таблице 2.

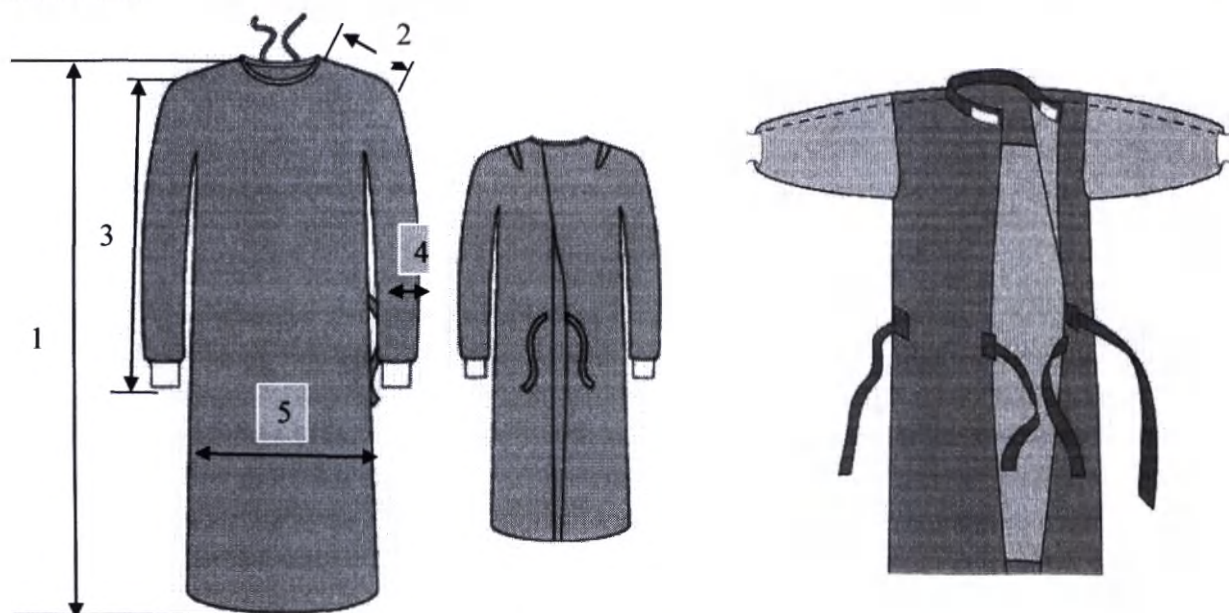


Рис. 2

Таблица 2.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	140±5 см	140±5 см	140±5 см	140±5 см	140±5 см	140±5 см	140±5 см	140±5 см
2	12,5±0,5 см	13±0,5 см	14,5±0,5 см	16±0,5 см	17,5±0,5 см	18±0,5 см	19±0,5 см	20±0,5 см
3	58,5±1 см	60±1 см	61,5±1 см	63±1 см	64,5±1 см	66±1 см	67,5±1 см	69±1 см
4	15±0,5 см	16±0,5 см	17±0,5 см	18±0,5 см	19±0,5 см	20±0,5 см	21±0,5 см	22±0,5 см
5	65±1 см	68±1 см	71±1 см	74±1 см	77±1 см	80±1 см	83±1 см	86±1 см

3.1.2.3 Длина завязок должна быть:

- для горловины: 30 ± 1 см;
- для пояса: 60 ± 2 см;

3.1.3 Требования к халату на липучке

3.1.3.1 Халат прямого силуэта, с длинными рукавами с манжетой (модель 1), резинкой (модель 2) или без них (модель 3), длиной 120см в готовом виде. Воротник отложной.

3.1.3.2 Общий вид и размеры халата на липучке должны соответствовать рисунку 3 и таблице 3.

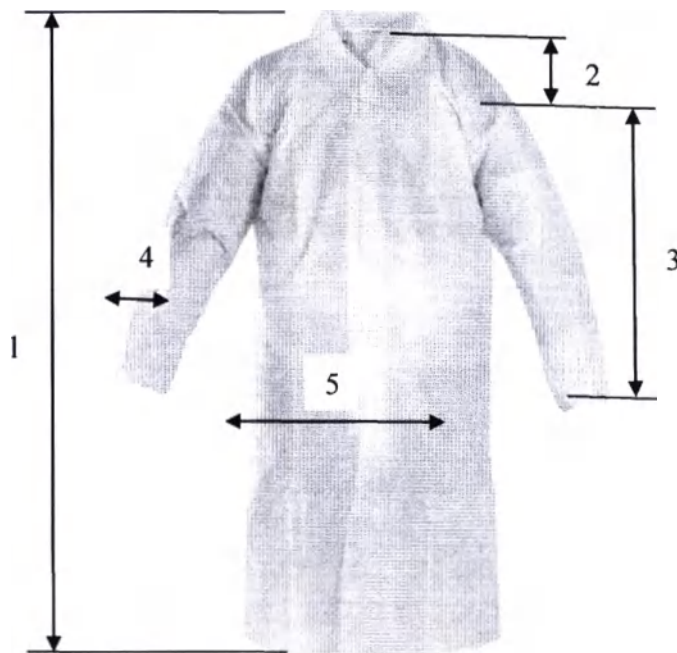


Рис. 3

Таблица 3.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	120 ± 5 см	120 ± 5 см	120 ± 5 см	120 ± 5 см	120 ± 5 см	120 ± 5 см	120 ± 5 см	120 ± 5 см
2	$12,5 \pm 0,5$ см	$13 \pm 0,5$ см	$14,5 \pm 0,5$ см	$16 \pm 0,5$ см	$17,5 \pm 0,5$ см	$18 \pm 0,5$ см	$19 \pm 0,5$ см	$20 \pm 0,5$ см
3	$58,5 \pm 1$ см	60 ± 1 см	$61,5 \pm 1$ см	63 ± 1 см	$64,5 \pm 1$ см	66 ± 1 см	$67,5 \pm 1$ см	69 ± 1 см
4	$15 \pm 0,5$ см	$16 \pm 0,5$ см	$17 \pm 0,5$ см	$18 \pm 0,5$ см	$19 \pm 0,5$ см	$20 \pm 0,5$ см	$21 \pm 0,5$ см	$22 \pm 0,5$ см
5	65 ± 1 см	68 ± 1 см	71 ± 1 см	74 ± 1 см	77 ± 1 см	80 ± 1 см	83 ± 1 см	86 ± 1 см

3.1.4 Требования к халату на кнопках

3.1.4.1 Халат прямого силуэта, с длинными рукавами с манжетой, длиной 120см в готовом виде. Воротник на трикотажной манжете не менее 5см.

3.1.4.2 Общий вид и размеры халата на кнопках должны соответствовать рисунку 4 и таблице 4.

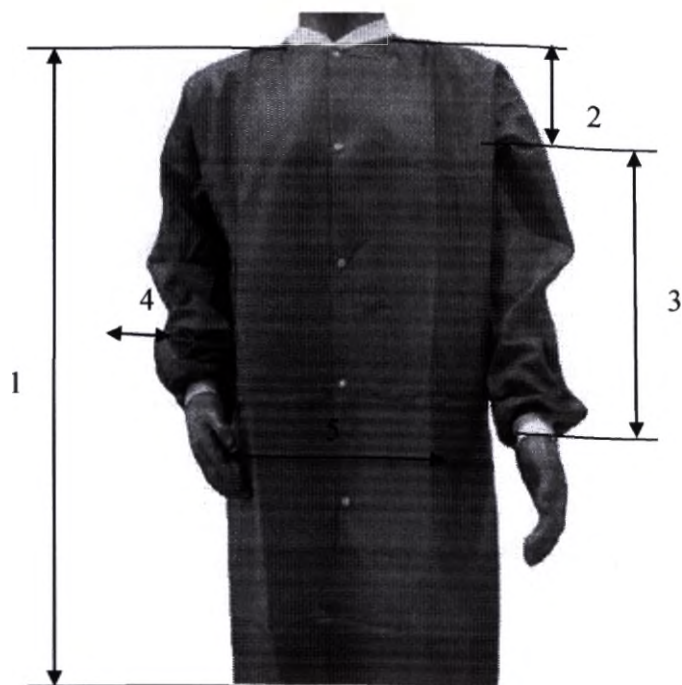


Рисунок 4

Таблица 4.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	120±5 см	120±5 см	120±5 см	120±5 см	120±5 см	120±5 см	120±5 см	120±5 см
2	12,5±0,5 см	13±0,5 см	14,5±0,5 см	16±0,5 см	17,5±0,5 см	18±0,5 см	19±0,5 см	20±0,5 см
3	58,5±1 см	60±1 см	61,5±1 см	63±1 см	64,5±1 см	66±1 см	67,5±1 см	69±1 см
4	15±0,5 см	16±0,5 см	17±0,5 см	18±0,5 см	19±0,5 см	20±0,5 см	21±0,5 см	22±0,5 см
5	65±1 см	68±1 см	71±1 см	74±1 см	77±1 см	80±1 см	83±1 см	86±1 см

3.1.5 Требования к бахилам на завязках

3.1.5.1 Общий вид и размеры бахил на завязках должны соответствовать рисунку 5 и таблице 5.

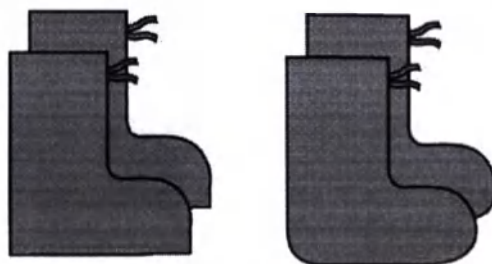


Рис.5

Таблица 5.

Исполнение	Длина по стопе, см	Высота, см	Длина завязок, см
Высокие	41±0,5	62,0±0,5см	60±1
Средние	41±0,5	50,0±0,5см	50±1
Низкие	41±0,5	30,0±0,5см	40±1

3.1.5.2 Прочность отрыва завязок от бахил должна быть не менее 30 Н

3.1.6 Требования к бахилам на резинке

3.1.6.1 Общий вид и размеры бахил на резинке должны соответствовать рисунку 6 и таблице 6.

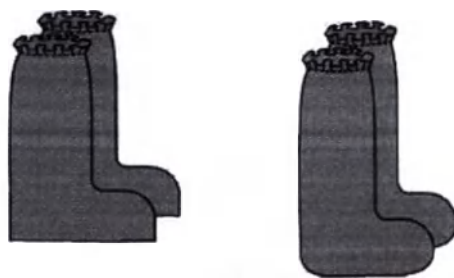


Рис.6

Таблица 6.

Исполнение	Длина по стопе, см	Высота, см
Высокие	$41 \pm 0,5$	$62,0 \pm 0,5$ см
Средние	$41 \pm 0,5$	$50,0 \pm 0,5$ см
Низкие	$41 \pm 0,5$	$30,0 \pm 0,5$ см

3.1.6.2 Прочность резинки при растяжении должна быть не менее 30 Н.

3.1.7 Требования к рубашке

3.1.7.1 Рубашка прямого силуэта с длинными втачными рукавами, с V-образным вырезом горловины. Срезы рукавов и низ изделия не обработаны.

3.1.7.2 Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенным на рисунке 7 и таблице 7.

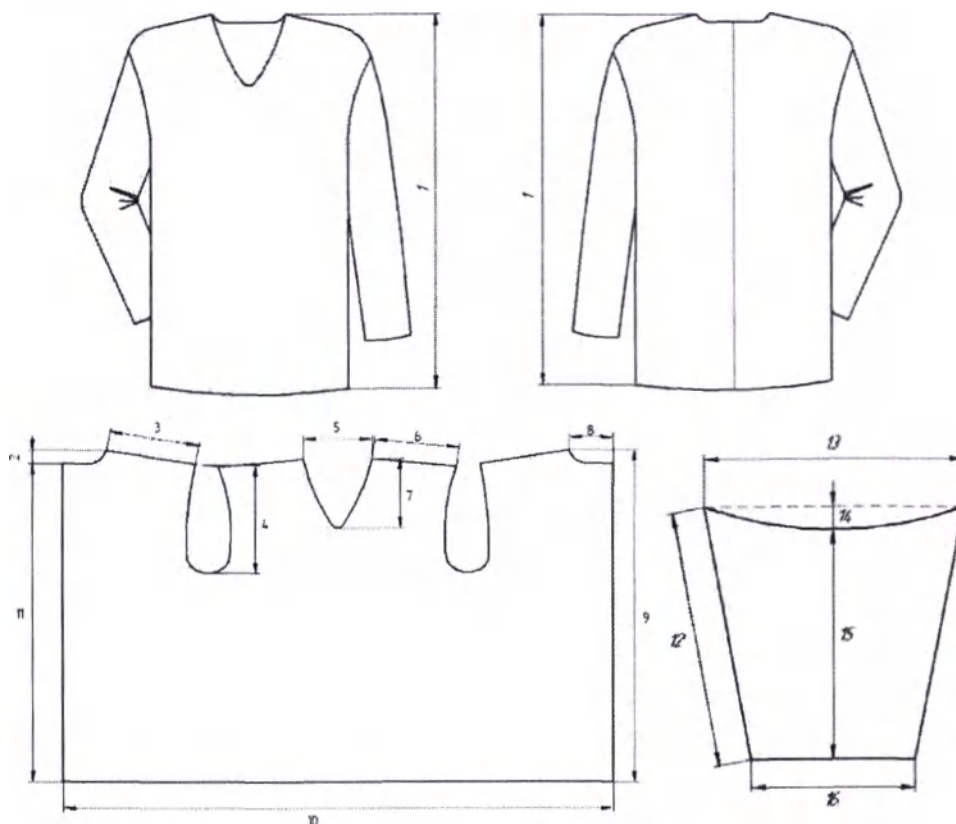


Рисунок 7.

Таблица 7.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	80,0±2см	80,0±2см	82,5±2см	83,5±2см	85,0±2см	85,0±2см	85,0±2см	85,0±2см
2	4±0,5см	4±0,5см	4±0,5см	4±0,5см	4±0,5см	4±0,5см	4±0,5см	4±0,5см
3	12,5±0,5 см	13±0,5 см	14,5±0,5 см	16±0,5 см	17,5±0,5 см	18±0,5 см	19±0,5 см	20±0,5 см
4	29,2±1,0см	29,2±1,0см	30,2±1,0см	30,2±1,0см	31,2±1,0см	31,2±1,0см	32,2±1,0см	32,2±1,0см
5	18,2±0,5см	18,2±0,5см	19,0±0,5см	19,0±0,5см	19,8±0,5см	19,8±0,5см	19,8±0,5см	19,8±0,5см
6	12,5±0,5 см	13±0,5 см	14,5±0,5 см	16±0,5 см	17,5±0,5 см	18±0,5 см	19±0,5 см	20±0,5 см
7	20,0±0,5см	20,0±0,5см	20,6±0,5см	20,6±0,5см	21,2±0,5см	21,2±0,5см	21,2±0,5см	21,2±0,5см
8	10,5±0,5см	10,5±0,5см	10,9±0,5см	10,9±0,5см	11,3±0,5см	11,3±0,5см	11,7±0,5см	11,7±0,5см
9	82,5±1см	82,5±1см	85,0±1см	85,0±1см	87,5±1см	87,5±1см	90,0±1см	90,0±1см
10	134±1см	136±1см	138±1см	140±1см	144±1см	148±1см	152±1см	156±1см
11	78,5±1см	78,5±1см	80,5±1см	80,5±1см	82,5±1см	82,5±1см	84,5±1см	84,5±1см
12	58,5±1 см	60±1 см	61,5±1 см	63±1 см	64,5±1 см	66±1 см	67,5±1 см	69±1 см
13	64,5±1см	64,5±1см	67,0±1см	67,0±1см	69,5±1см	69,5±1см	71,0±1см	71,0±1см
14	7,3±0,5см	7,3±0,5см	7,3±0,5см	7,3±0,5см	7,3±0,5см	7,3±0,5см	7,3±0,5см	7,3±0,5см
15	55,7±1см	55,7±1см	57,7±1см	57,7±1см	59,7±1см	59,7±1см	61,7±1см	61,7±1см
16	30±1см	32±1см	34±1см	36±1см	38±1см	40±1см	42±1см	44±1см

3.1.8 Требования к брюкам

3.1.8.1 Брюки прямые длинные, в области талии собраны на эластичную или неэластичную тесьму, продетую в кулиску на поясе. Ход неэластичной тесьмы внутри кулиски на поясе должен быть свободным.

3.1.8.2 Параметры готового изделия должны соответствовать размерным характеристикам, приведенным на рисунке 8 и таблице 8.

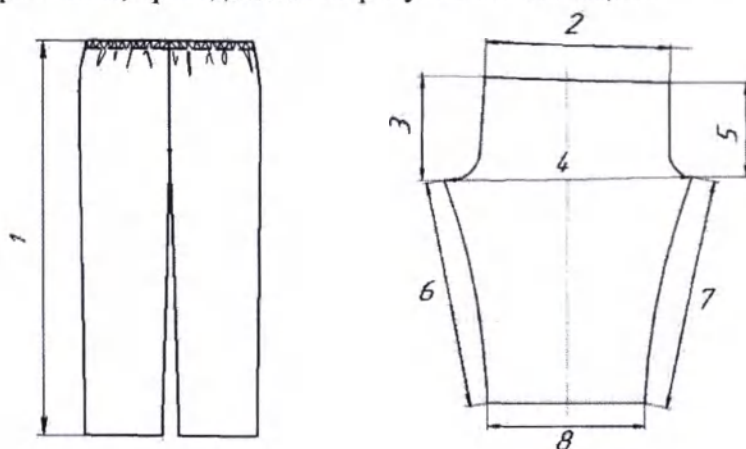


Рисунок 8

Таблица 8.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	118,0±2см	120,0±2см	122,0±2см	123,0±2см	126,0±2см	129,0±2см	132,0±2см	135,0±2см
2	65,5±0,5см	66,5±0,5см	69,5±0,5см	72,5±0,5см	74,5±0,5см	76,5±0,5см	78,5±0,5см	80,5±0,5см
3	37,5±0,5см	38,5±0,5см	39,0±0,5см	39,5±0,5см	40,0±0,5см	40,5±0,5см	41,0±0,5см	42,0±0,5см
4	85,5±1,0см	86,5±1,0см	89,0±1,0см	90,0±1,0см	92,0±1,0см	94,0±1,0см	96,0±1,0см	98,0±1,0см
5	34,0±0,5см	34,5±0,5см	35,0±0,5см	35,5±0,5см	36,0±0,5см	36,5±0,5см	37,0±0,5см	37,5±0,5см
6	85,0±1 см	86,0±1 см	88,0±1см	89,0±1см	90,0±1см	91,0±1см	92,0±1см	93,0±1см
7	85,0±1см	86,0±1см	88,0±1см	89,0±1см	90,0±1см	91,0±1см	92,0±1см	93,0±1см
8	49,0±0,5см	49,5±0,5см	51,0±0,5см	51,5±0,5см	52,5±0,5см	53,5±0,5см	54,5±0,5см	55,5±0,5см

3.1.9 Требования к шапочке-шлем

3.1.9.1 Шапочка-шлем полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо, по внешнему краю лицевой области фиксируется резинкой. По низу шапочки втачана пелерина, которая придает дополнительную защиту шейному отделу и плечевому поясу.

3.1.9.2 Общий вид и размеры шапочки-шлем должны соответствовать рисунку 9 и таблице 9.

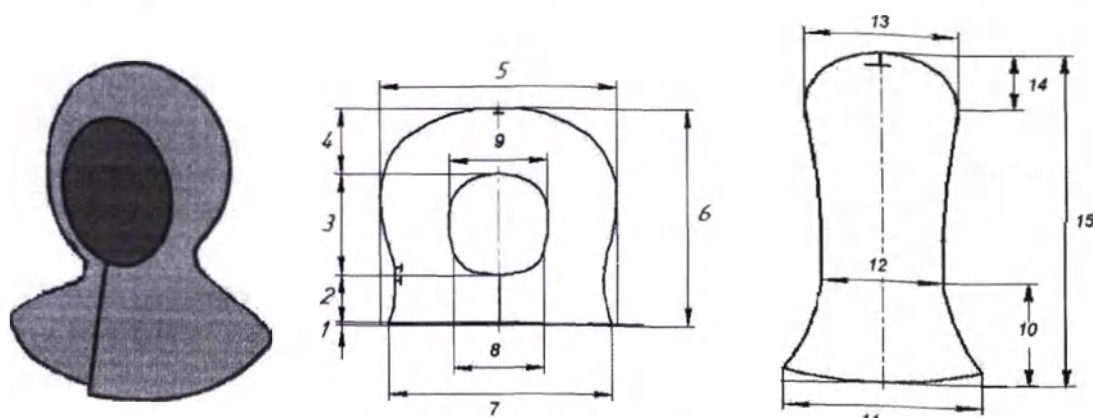


Рис.9

Таблица 9.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	1,5±0,5см	1,5±0,5см	1,5±0,5см	1,5±0,5см	2,5±0,5см	2,5±0,5см	2,5±0,5см	2,5±0,5см
2	8,5±0,5см	8,5±0,5см	9,0±0,5см	9,0±0,5см	9,5±0,5см	9,5±0,5см	10,0±0,5см	10,0±0,5см
3	15,5±0,5см	15,5±0,5см	16±0,5см	16±0,5см	16,5±0,5см	16,5±0,5см	17,0±0,5см	17,0±0,5см
4	11±1,0см	11±1,0см	11,5±1,0см	11,5±1,0см	12,0±1,0см	12,0±1,0см	12,5±1,0см	12,5±1,0см
5	54±1,0см	54±1,0см	56±1,0см	56±1,0см	58±1,0см	58±1,0см	60±1,0см	60±1,0см
6	37,5±1,0см	37,5±1,0см	38,5±1,0см	38,5±1,0см	39,5±1,0см	39,5±1,0см	40,5±1,0см	40,5±1,0см
7	42±1см	42±1см	44±1см	44±1см	46±1см	46±1см	48±1см	48±1см
8	16±0,5см	16±0,5см	16,5±0,5см	16,5±0,5см	17,0±0,5см	17,0±0,5см	17,5±0,5см	17,5±0,5см
9	18±0,5см	18±0,5см	18,5±0,5см	18,5±0,5см	19±0,5см	19±0,5см	19,5±0,5см	19,5±0,5см
10	26±0,5см	26±0,5см	27,5±0,5см	27,5±0,5см	28±0,5см	28±0,5см	28,5±0,5см	28,5±0,5см
11	31±0,5см	31±0,5см	32±0,5см	32±0,5см	33±0,5см	33±0,5см	34±0,5см	34±0,5см
12	21±0,5см	21±0,5см	22±0,5см	22±0,5см	23,0±0,5см	23,0±0,5см	24,0±0,5см	24,0±0,5см
13	20,5±0,5см	20,5±0,5см	21±0,5см	21±0,5см	21,5±0,5см	21,5±0,5см	22±0,5см	22±0,5см
14	6±0,5см	6±0,5см	6,5±0,5см	6,5±0,5см	7±0,5см	7±0,5см	7,5±0,5см	7,5±0,5см
15	64,5±1см	64,5±1см	65,5±1см	65,5±1см	66,5±1см	66,5±1см	67,5±1см	67,5±1см

3.1.10 Требования к шапочке-колпак

3.1.10.1 Шапочка-колпак является неотъемлемой частью средств индивидуальной защиты персонала медицинских учреждений. Высота изделия 18 см. Конструкция имеет, цилиндрическую округлую форму для плотного прилегания к голове, фиксируется завязками.

3.1.10.2 Общий вид и размеры шапочки-колпак должны соответствовать рисунку 10 и таблице 10.

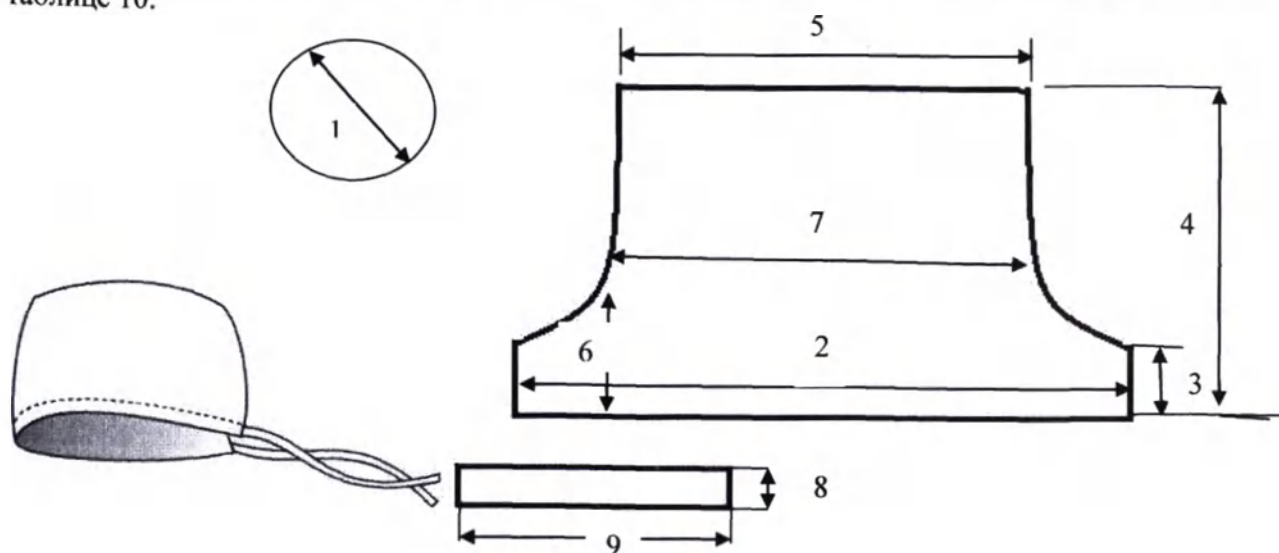


Рис. 10

Таблица 10.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	19,5±0,5см	19,5±0,5см	19,5±0,5см	19,5±0,5см	19,5±0,5см	19,5±0,5см	19,5±0,5см	19,5±0,5см
2	61±0,5см	61±0,5см	61,5±0,5см	61,5±0,5см	62,5±0,5см	62,5±0,5см	63±0,5см	63±0,5см
3	7±0,5см	7±0,5см	7,5±0,5см	7,5±0,5см	8±0,5см	8±0,5см	8±0,5см	8±0,5см
4	21±0,5см	21±0,5см	21,5±0,5см	21,5±0,5см	22±1,0см	22±1,0см	22±1,0см	22±1,0см
5	50,5±0,5см	50,5±0,5см	52,5±0,5см	52,5±0,5см	54,5±1,0см	54,5±1,0см	56,5±1,0см	56,5±1,0см
6	11±0,5см	11±0,5см	12±0,5см	12±0,5см	13±1,0см	13±1,0см	13±1,0см	13±1,0см
7	54±0,5см	54±0,5см	56±0,5см	56±0,5см	58±1см	58±1см	60±1см	60±1см
8	3±0,5см	3±0,5см	3,5±0,5см	3,5±0,5см	4,5±0,5см	4,5±0,5см	4,5±0,5см	4,5±0,5см
9	23±0,5см	23±0,5см	23,5±0,5см	23,5±0,5см	24,5±0,5см	24,5±0,5см	25±0,5см	25±0,5см

3.1.11 Требования к шапочке-берет

3.1.11.1 Шапочка-берет для более плотного прилегания к голове оснащена резинкой, что обеспечивает их комфортное применение для пышных причесок. Мягкая резинка, расположенная по кругу шапочки-берета не собирается в складки и надежно фиксирует шапочку и убранные под нее волосы на голове пользователя не оставляя следов на лице, даже после длительного ношения.

3.1.11.2 Общий вид и размеры шапочки-берет должны соответствовать рисунку 11 и таблице 11.

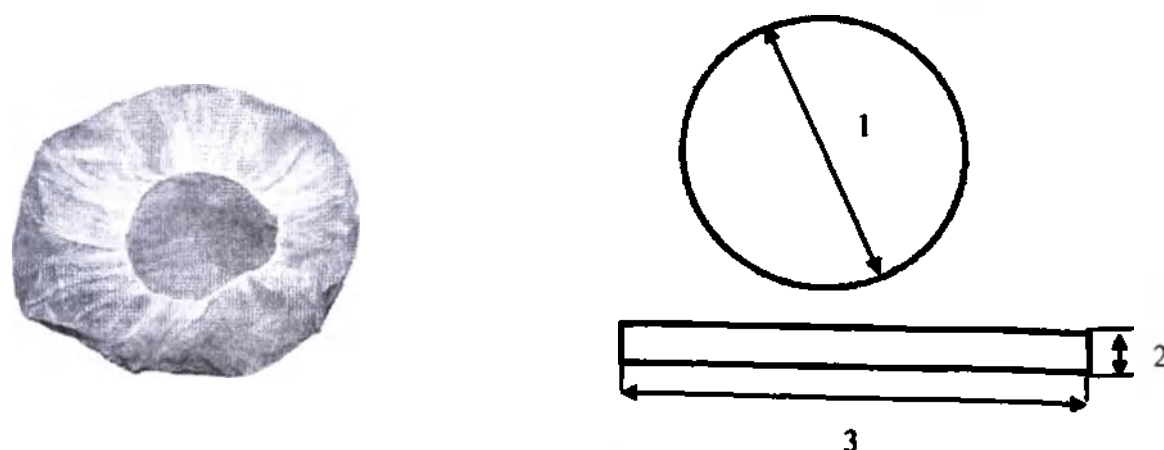


Рис.11

Таблица 11.

Размер	48-50	50-52	52-54	54-56	56-58	58-60	60-64	64-70
1	30±0,5см	30±0,5см	30±0,5см	30±0,5см	30±0,5см	30±0,5см	30±0,5см	30±0,5см
2	12±0,5см	12±0,5см	12±0,5см	12±0,5см	12±0,5см	12±0,5см	12±0,5см	12±0,5см
3	93±0,5см	93±0,5см	93±0,5см	93±0,5см	93±0,5см	93±0,5см	93±0,5см	93±0,5см

3.1.12 Требования к нарукавникам

Общий вид и размеры нарукавников должны соответствовать рисунку 11 и таблице 12.

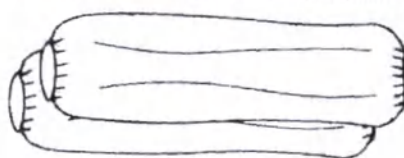


Рис.12

Таблица 12.

Размер	Значение
Длина	45±1см
Ширина	22±1см

3.1.13 Требования к фартуку

Общий вид и размеры фартука должны соответствовать рисунку 13 и таблице 13.



Рис.13

Таблица 13.

Размер	Значение	
Длина	140±3 см	110±3 см
Ширина	80±1 см	70±1 см
Длина завязок пояса	80±10 см	60±10 см
Длина завязок для шеи	80±10 см	60±10 см

3.1.14 Требование к салфеткам

Размеры салфеток по длине и ширине в готовом виде должны соответствовать таблице

14.

Таблица 14.

№ п.п	Исполнение	Длина, см	Ширина, см
1	40*40	40±1	40±1
2	40*60	40±1	60±1
3	60*60	60±1	60±1
4	60*70	60±1	70±1
5	70*70	70±1	70±1
6	70*80	70±1	80±1
7	80*80	80±1	80±1

3.1.15 Размеры комплекта одежды должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека, указанным в таблице 15.

Таблица 15

Размер	Интервал обхвата груди человека, см	Интервал роста человека, см
48-50	94÷102	164 ÷ 172
50-52	98÷106	173 ÷ 181
52-54	102÷110	182 ÷ 188
54-56	106÷114	189 ÷ 195
56-58	110÷118	189 ÷ 195
58-60	114÷122	189 ÷ 195
60-64	118÷126	189 ÷ 195
64-70	122÷130	189 ÷ 195

3.1.16 Масса изделий должна соответствовать, указанным в таблицах: 16.

Таблица 16

№ п.п	Наименование	Размер	Плотность, г/м ² /Масса, г				
			25	30	35	40	60
1.	Комбинезон	48-50	104±10	122±10	140±10	158±10	231±10
		50-52	117±10	138±10	159±10	179±10	263±10
		52-54	117±10	138±10	159±10	179±10	263±10
		54-56	118±10	139±10	160±10	181±10	265±10
		56-58	119±10	141±10	162±10	183±10	269±10
		58-60	120±10	141±10	163±10	184±10	270±10
		60-64	120±10	142±10	163±10	185±10	271±10
		64-70	121±10	142±10	164±10	185±10	272±10
2.	Халат на завязках	48-50	74±10	89±10	104±10	118±10	177±10
		50-52	75±10	90±10	107±10	120±10	180±10
		52-54	76±10	92±10	107±10	122±10	183±10
		54-56	77±10	93±10	108±10	124±10	185±10
		56-58	79±10	94±10	110±10	125±10	188±10
		58-60	80±10	95±10	111±10	127±10	190±10
		60-64	81±10	97±10	113±10	129±10	193±10
		64-70	82±10	98±10	114±10	131±10	196±10
3.	Халат на липучке (кнопках)	48-50	67±10	80±10	94±10	107±10	160±10
		50-52	68±10	82±10	95±10	109±10	160±10
		52-54	69±10	83±10	97±10	110±10	165±10
		54-56	70±10	84±10	98±10	112±10	168±10
		56-58	71±10	86±10	100±10	114±10	171±10
		58-60	72±10	87±10	101±10	116±10	173±10
		60-64	74±10	88±10	103±10	117±10	176±10
		64-70	75±10	89±10	104±10	119±10	178±10
4.	Бахилы на завязках (пара)	Высокие	23±10	28±10	32±10	37±10	55±10
		Средние	19±10	23±10	27±10	31±5	46±5
		Низкие	12±7	14±7	16±7	19±7	28±7
5.	Бахилы на резинке (пара)	Высокие	23±10	28±10	32±10	37±10	55±10
		Средние	19±10	23±10	27±10	31±5	46±5
		Низкие	12±7	14±7	16±7	19±7	28±7
6.	Рубашка	48-50	49±10	59±10	68±10	78±10	117±10
		50-52	51±10	61±10	68±10	78±10	117±10
		52-54	51±10	61±10	71±10	81±10	121±10
		54-56	51±10	61±10	71±10	81±10	122±10
		56-58	52±10	62±10	73±10	83±10	124±10
		58-60	52±10	62±10	73±10	83±10	124±10
		60-64	53±10	63±10	74±10	84±10	126±10
		64-70	53±10	63±10	74±10	84±10	126±10
7.	Брюки	48-50	43±10	51±10	60±10	68±10	102±10
		50-52	44±10	52±10	61±10	70±10	104±10
		52-54	44±10	53±10	62±10	71±10	106±10
		54-56	45±10	54±10	62±10	71±10	107±10
		56-58	46±10	55±10	64±10	73±10	109±10
		58-60	47±10	56±10	65±10	75±10	112±10
		60-64	48±10	57±10	67±10	76±10	114±10
		64-70	49±10	59±10	68±10	78±10	117±10
8	Шапочка-шлем	-	15±5	18±5	20,5±5	22±5	32±5

9.	Шапочка-колпак	-	4±2	5±2	6±2	7±2	9±2
10.	Шапочка-берет	-	6±2	7±2	8±5	9±5	14±5
11.	Нарукавники (пара)	-	12±3	14±3	16±3	18±3	26±3
12.	Фартук	110	18±5	21±5	25±5	28±5	42±5
		140	25±5	30±5	35±5	40±5	60±5
13.	Салфетка	40*40	4±1	5±1	5±1	6,5±1	10±1
		40*60	6±1	7±1	7±1	10±1	15±1
		60*60	9±1	11±1	11±1	15±1	22±1
		60*70	10,5±1	12,5±1	12,5±1	17±1	25±1
		70*70	12,3±1	15±1	15±1	20±1	30±1
		70*80	14±2	17±2	17±2	23±2	34±2
		80*80	16±2	19±2	19±2	26±2	39±2

3.1.17 Прочность швов между деталями одежды должна быть не менее 15 Н.

3.1.18 Поверхность изделия не должна иметь механических повреждений и разрывов.

3.1.19 Комплект при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

3.1.20 Комплект в транспортной упаковке должен быть устойчив к климатическим воздействиям при транспортировании для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

3.2 Основные требования к изготовлению

3.2.1 Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления изделий, - по ГОСТ 12807.

3.2.2 Нитки – по ГОСТ 6309

3.2.3 Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены.

3.2.4 Все срезы изделия соединяют стачным швом шириной 0,3÷0,5 см по ГОСТ 12807. Частота строчки должна быть не менее трех стежков в одном сантиметре.

3.2.5 Передние и нижние срезы бахилы соединяют одинарным прямым швом на одноигльной швейной машине челночного типа (челночным стачным стежком по ГОСТ 12807) с закрепками в начале и конце строчки на пятке.

3.2.6 Готовая одежда должна соответствовать эстетическим требованиям человека к внешнему виду и цвету, быть комфортной при носке.

3.2.7 Фурнитура должна быть качественной, функционально устойчивой в процессе ее эксплуатации. Недопустимыми дефектами фурнитуры являются механические разрушения конструкций и поверхностей: дефекты поверхности застежек-молний.

3.3 Требования к материалам

3.3.1 Информация об используемых материалах

Ткань: Нетканый материал 100% полипропилен «спанбонд» плотностью: 25 или 30 или 40 или 60 г/м², цвет: белый, производства КЗНМ (Котовский завод нетканых материалов) или ламинированный спанбонд плотностью: 40 г/м², цвет: белый производства КЗНМ (Котовский завод нетканых материалов).

Нитки (100% полиэстер, Арт. max 50/2)

Застежка-молния: (молния спиральная неразъемная тип 5 или 3)

Липучка: нейлон 40% полиэстер 60%.

Кнопка: ABS пластик.

Эластичная тесьма (20% спандекс и 80% полиэстер).

Манжета: 100% ПЭ.

3.3.2 Параметры ткани должны соответствовать таблице 16.

Таблица 16.

Наименование эксплуатационных характеристик (показателей)	Значение
Допустимое отклонение поверхностной плотности	$\pm 5\%$
Разрывная нагрузка в сухом состоянии в продольном направлении	$\geq 25 \text{ Н}$
Разрывная нагрузка в сухом состоянии в поперечном направлении	$\geq 16 \text{ Н}$
Разрывная нагрузка во влажном состоянии в продольном направлении	$\geq 25 \text{ Н}$
Разрывная нагрузка во влажном состоянии в поперечном направлении	$\geq 16 \text{ Н}$

3.3.3 Водоупорность ламинированного спанбонда должна быть не менее 600 с при давлении воды в разбрызгивателе 0.5 кгс/см².

3.3.4 Материалы, используемые при изготовлении изделия должны быть безопасны, не вызывать аллергических реакций.

4. Порядок применения

Важно:

- Проверьте срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности комплект непригоден к применению.
- Не допускается использование одежды при наличии механических повреждений.
- Одежду используют однократно.

4.1 Порядок надевания

4.1.1 Комбинезон

Комбинезон надевают поверх рабочей одежды и обуви в следующей последовательности:

- надеть штанины комбинезона по очереди. Одновременно натягивать обе штанины нельзя: комбинезон может порваться;
- надеть рукава комбинезона по очереди. Одновременно натягивать оба рукава нельзя: комбинезон может порваться;
- надеть капюшон и отрегулировать плотность его прилегания к овалу лица при помощи эластичной ленты; застегнуть застежку-молнию комбинезона снизу-вверх без отверстий и складок;

Убедитесь в том, что элементы одежды надеты правильно: исключены кожные покровы, отсутствуют зазоры между элементами.

4.1.2 Халат с завязками

- Просуньте руки в рукава так, чтобы фиксирующие элементы – завязки, оказались на спине. Полы халата должны заходить одна за другую, чтобы избежать открытых участков одежды.

Горловина халата фиксируются с помощью завязок или липучки на шее.

Пояс фиксируется сзади халата на уровне талии.

4.1.3 Халат на липучке или кнопках

- Надеть рукава халата по очереди. Одновременно натягивать оба рукава нельзя: халат может порваться;
- Застегнуть халат на липучку или кнопки.

4.1.4 Бахилы

Надеть бахилы поверх обуви. Для предотвращения сползания бахилы фиксируются завязками сверху или резинкой.

4.1.5 Рубашка

Взять рубашку следующим образом: правой рукой держим правый рукав, левой рукой держим левый рукав. Рубашку надеваем через горловину.

4.1.6 Брюки

Завести ногу, аккуратно отпуская брючину так, так чтобы она не касалась пола.

4.1.7 Шапочка-шлем

Шапочка-шлем должна закрывать волосистую часть головы и шею, открыто только лицо, по внешнему краю лицевой области фиксируется резинкой.

4.1.8 Шапочка-колпак

Шапочка-колпак должна закрывать волосистую часть головы. Для плотного прилегания к голове фиксируется завязками.

4.1.9 Шапочка-берет

Шапочка-берет должна закрывать волосистую часть головы. Для более плотного прилегания к голове оснащена резинкой, что обеспечивает комфортное применение для пышных причесок. Мягкая резинка, расположенная по кругу шапочки-берета, не собирается в складки и надежно фиксирует шапочку и убранные под нее волосы на голове пользователя, не оставляя следов на лице, даже после длительного ношения.

4.1.10 Нарукавники

Надеть по очереди на рукава поверх рабочей одежды.

4.1.11 Фартук

Одеваем петлю на голову, фиксируем завязками на спине.

4.1.12 Салфетка

Салфетка предназначена для застилания операционного стола, инструментального стола, делают ширму, накрывают аппаратуру для защиты от бактерий и распространения инфекции.

4.2 Порядок снятия

Одежду можно снимать в специально выделенном помещении.

В помещении должны быть предусмотрены маркированные емкости для отходов класса Б.

Одежду снимают медленно, не торопясь.

4.2.1 Снимаем комбинезон

Расстегнуть застёжку-молнию на комбинезоне, снять капюшон, рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри. Не расправляя, погрузите комбинезон в емкость для отходов класса Б.

4.2.2 Снимаем халат с завязками

Развязать все завязки на халате. Развязать завязки или расстегнуть липучку на горловине халата. Снять халат с шеи и плеч, касаясь только внутренней части халата. Вывернуть халат наизнанку. Положить халат в емкость для отходов класса Б.

4.2.3 Снимаем халат на липучке или кнопках

Расстегнуть халат. Снять халат вначале с одной руки. Снять халат со второй руки, прикасаясь к нему изнутри и выворачивая наизнанку, свернуть. Положить халат в емкость для отходов класса Б.

4.2.4 Снимаем бахилы.

Развязываем завязки (при наличии), снимаем поочередно правую и левую ногу, сворачивая их наружной стороной вовнутрь. Положить бахилы в емкость для отходов класса Б.

4.2.5 Снимаем рубашку

Правой рукой держим левый рукав. Захватываем рукава рубашки, поочередно вытягиваем вперед. Наклоняем туловище вперед, вытягиваем руки, поочередно стягивая каждый рукав вперед, снимая рубашку через горловину. Складываем рубашку наружной стороной внутрь. Положить рубашку в емкость для отходов класса Б.

4.2.6 Снимаем брюки

Снимаем поочередно с правой и левой ноги, не касаясь поверхности кожи. Выворачиваем брюки лицевой стороной вовнутрь. Положить брюки в емкость для отходов класса Б.

4.2.7 Снимаем шапочку-шлем.

Рукой за верхнюю часть шлема вытягиваем наверх. Складываем шапочку верхней частью вовнутрь. Положить шапочку в емкость для отходов класса Б.

4.2.8 Снимаем шапочку-колпак

Развязываем завязки. Снимаем шапочку. Складываем шапочку верхней частью вовнутрь. Положить шапочку в емкость для отходов класса Б.

4.2.9 Снимаем шапочку-берет

Снимаем шапочку. Складываем шапочку верхней частью вовнутрь. Положить шапочку в емкость для отходов класса Б.

4.2.10 Снимаем нарукавники

Снимаем поочередно с правой и левой руки. Складываем верхней частью вовнутрь. Обработайте руки. Положить нарукавники в емкость для отходов класса Б.

4.2.11 Снимаем фартук

Развязываем завязки, снимаем через голову. Складываем верхней частью вовнутрь. Положить фартук в емкость для отходов класса Б.

4.2.12 Салфетку после применения положить в емкость для отходов класса Б.

4.3 Обеззараживание

Снятие и замена защитной одежды должны производиться не реже 1 раза в смену, либо при каждом входе, а при наличии видимых загрязнений биологическими жидкостями или выделениями пациентов - незамедлительно.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять в влагонепроницаемых перчатках одноразовых (при медицинских манипуляциях) или многократного применения. Дезинфицирующие средства хранят закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкции по его применению.

5. Маркировка

5.1. Маркировка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ 10581, ГОСТ Р 50444 (в части маркировки) и данного документа. Информация наносится на изделие на русском языке.

5.2 Маркировка потребительской упаковки должна содержать:

- полное наименование медицинского изделия;
- наименование производителя;
- адрес производителя;
- состав комплекта;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер партии;
- размер и цвет;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- дату изготовления (месяц, год);
- срок годности изделия;
- наименование материала, из которого изготовлено изделие;
- символ «Нестерильно»;
- символ «Запрет на повторное применение»;
- символ «Беречь от влаги»;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света».

5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги», «Не допускать воздействия солнечного света».

5.4 Допускается нанесение символов, используемых для медицинских изделий в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 15223-1.

5.5 Символы используемые при маркировке

- Символ «Нестерильно»



- Символ «Запрет на повторное применение»



- Символ «Не допускать воздействия солнечного света»



- Символ «Беречь от влаги»



6. Транспортировка, хранение и эксплуатация

6.1 Изделия могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 10581 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

6.2 Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.3 Изделие должно храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0 °С до +35 °С. Изделие должно храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

6.4 Изделие должно использоваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре +25°С и при более низких температурах без конденсации влаги, атмосферном давлении 84+106,7 кПа (650+800 мм. рт.ст.).

6.5 Длительность ношения одежды не более 8-х часов.

7. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Изделие одноразового использования техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.

8. Утилизация

8.1 Изделие должно быть собрано и передано специальным лицензированным организациям, занимающимися утилизацией медицинских отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с нормами и требованиями, действующими на территории РФ.

8.2 Использованная по назначению одежда утилизируются в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б.

8.3 Не использованные по назначению изделия с истекшим сроком годности, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса А.

9. Гарантия

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения.

9.2 Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

10. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «Дарлин»

625030, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 9 Января, д.164, корпус 2, офис 25

Тел.: (3452) 73-73-00

E-mail: darlntmn@mail.ru

Приложение 1

Комплект одноразовой медицинской одежды из нетканых материалов не стерильный по ТУ 14.19.32-003-67798088-2020, варианты комплектаций:

1. Комплект 1 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70), в составе:

1.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 1 шт.

1.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

1.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.

2. Комплект 2 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70), в составе:

2.1 Комбинезон одноразовый - 1 шт.

2.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

2.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак - 1 шт.

3. Комплект 3 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

3.1 Комбинезон одноразовый - 1 шт.

3.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

4. Комплект 4 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

4.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 1 шт.

4.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

4.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.

4.4 Комбинезон - 1 шт.

4.5 Наручники - 2 шт.

4.6 Фартук, длина 110 или 140 см - 1 шт.

4.7 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80* 80 - 1 шт.

5. Комплект 5 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

5.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 1 шт.

5.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

5.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1 шт.

5.4 Рубашка - 1 шт.

5.5 Брюки - 1 шт.

5.6 Наручники - 2 шт.

5.7 Фартук, длина 110 или 140 см - 1 шт.

5.8 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80* 80 - 1 шт.

6. Комплект 6 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

6.1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 или модель 2 или модель 3 или модель 4 или модель 5 или модель 6 или модель 7 или модель 8 - 2шт.

6.2 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем -2шт.

7. Комплект 7 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

7.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3 - 1шт.

7.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

7.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1шт.

8. Комплект 8 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

8.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3- 1шт.

8.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

8.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1шт.

8.4 Комбинезон - 1шт.

8.5 Наручники - 2шт.

8.6 Фартук, длина 110 или 140 см - 1шт.

8.7 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80* 80 - 1шт.

9. Комплект 9 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

9.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3 - 1шт.

9.2 Бахилы одноразовые высокие или средние или низкие, на завязках или резинке, с одинарной или двойной подошвой - 1 пара.

9.3 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем - 1шт.

9.4 Рубашка - 1шт.

9.5 Брюки - 1шт.

9.6 Наручники - 2шт.

9.7 Фартук, длина 110 или 140 см - 1шт.

9.8 Салфетка, размер: 40*40 или 40*60 или 60*60 или 60*70 или 70*70 или 70*80 или 80* 80 - 1шт.

10. Комплект 10 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

10.1 Халат медицинский одноразовый на липучке модель 1 или модель 2 или модель 3 - 2шт.

10.2 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем -2шт.

11. Комплект 11 (варианты размеров: 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-64, 64-70) в составе:

11.1 Халат медицинский одноразовый на кнопках - 2шт.

11.2 Шапочка-берет или шапочка-колпак, или шапочка-шлем -2шт.

Приложение 2
Макет маркировки

Комплект одноразовой медицинской одежды из нетканых материалов не стерильный по ТУ 14.19.32-003-67798088-2020 Комплект 5			
размер: 48-50	цвет: белый		
РУ № РЗН 2022/хххх от хх хххххх 2022 г.			
Состав комплекта: 1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 – 1 шт. 2 Бахилы одноразовые средние, на завязках, с одинарной подошвой – 1 пара. 3 Шапочка-шлем – 1 шт. 4 Рубашка – 1 шт. 5 Брюки – 1 шт. 6 Наручники – 1 пара. 7 Фартук, длина 120 см – 1 шт. 8 Салфетка, размер 40*60 – 1 шт.			
Материал: Нетканый материал 100% полипропилен «спанбонд» плотностью: 30 г/м²			
Дата изготовления: 04.2021 г.	Номер партии: 29042021		
Производитель: ООО «Дарлин» 625030, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 9 Января, д.164, корпус 2, офис 25			
Место производства: 625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Аккумуляторная д.1 стр. 1			
ТУ 14.19.32-003-67798088-2020			
Срок годности: 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил хранения и транспортировки.			
Тел. (3452) 73-73-00	e-mail: darlntmn@mail.ru		
			

Макет маркировки потребительской упаковки

Комплект одноразовой медицинской одежды из нетканых материалов не стерильный по ТУ 14.19.32-003-67798088-2020 Комплект 5			
размер: 48-50		цвет: белый	
ПУ № РЭН 2022/хххх от хх хххххх 2022 г.			
Количество: потребительских упаковок: 30 шт.			
Состав комплекта: 1 Халат медицинский одноразовый на завязках модель 1 – 1 шт. 2 Бахилы одноразовые средние, на завязках, с одинарной подошвой – 1 пара. 3 Шапочка-шлем – 1 шт. 4 Рубашка – 1 шт. 5 Брюки – 1 шт. 6 Наручники – 1 пара. 7 Фартук, длина 120 см – 1 шт. 8 Салфетка, размер 40*60 – 1 шт.			
Материал: Нетканый материал 100% полипропилен «спанбонд» плотностью: 30 г/м ²			
Дата изготовления: 04.2021 г.		Номер партии: 29042021	
Производитель: ООО «Дарлин» 625030, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 9 Января, д.164, корпус 2, офис 25 Место производства: 625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Аккумуляторная д.1 стр. 1			
ТУ 14.19.32-003-67798088-2020			
Срок годности: 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил хранения и транспортировки.			
Тел. (3452) 73-73-00		e-mail: darlintmn@mail.ru	
			

Макет маркировки транспортной упаковки

ООО «ДАРЛИН»

Итого в настоящем документе
23 (двадцать три) листа (ов)

Директор
Сорокин П. И.

[Handwritten signature]

