

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов
модулей иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers), в вариантах
исполнения

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов

Общий вид



Elecsys

P362 + P364 - Kont. výt.

Likvidace

P501

Bezpečnostní zna. Kontaktní telefon U všech reagentů vyřazení platný. Metodičky list každé vložky se v informacích navštívte pros naleznete bu verzi platnou pro získání c

Slovensky

Bezpečno

Pre in vtr

Dodržiav

so všetk

Infekčný

Varovať

nebezp

pokyn

Enviro

Na ur

predp

Bez

Pre

len na zák

Táto príloha obsahuje slo

Warning

Ele

FT3 III

P27

P

C

Elecsys FT3 III

REF: P9005803 190

Value sheet

Wertblatt

Fiche de valeurs

Ficha de valores

Foglio di valori

Vcard de valores

Verzinsark

Imiq	8.0	0.11 - 1.31	1.31	0.02
Kit	Bottle	Value	Range	1SD
LOT	LOT			

For cobas e 411 analyzer: test number 2450

For cobas e 601 and cobas e 602 analyzers: ACN 813

PreciControl U1

PreciControl Universal, 11731416

420025	411862*	5.31	4.35 - 6.27	0.32
		0.35	0.29 - 0.41	0.02
		3.46	2.84 - 4.08	0.21
		5.68	4.66 - 6.70	0.34
432653	411864*	0.37	0.30 - 0.44	0.02

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов

Elecsys FT3 III

cobas e analyzers

H317
P261, P272, P280
P333+P313, P362+P364
P501



REF 09005803190

CONTENT Σ 200

M	12 mL
R1	18 mL
R2	18 mL



COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim


Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD **CE** 0123 λ 2-8 °C

 dialog.roche.com

01

0702028501(1)

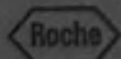

cobas[®]

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов

FT3 III

REF (240)09005803190

GTIN

(01)07613336171585

UDI

LOT (10)51655801




2021-12-31



2021-01-28

01

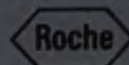

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов

Elecsys FT3 III

REF 09005803190


For **USA**: **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Monoclonal anti-T3-antibody (sheep) labeled
with ruthenium complex 18 ng/mL
- R2** Biotinylated T3 2.4 ng/mL



Rx only

01

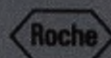

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов

Макет маркировки на русском языке

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4423 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 09005803190


Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 III), 200 тестов

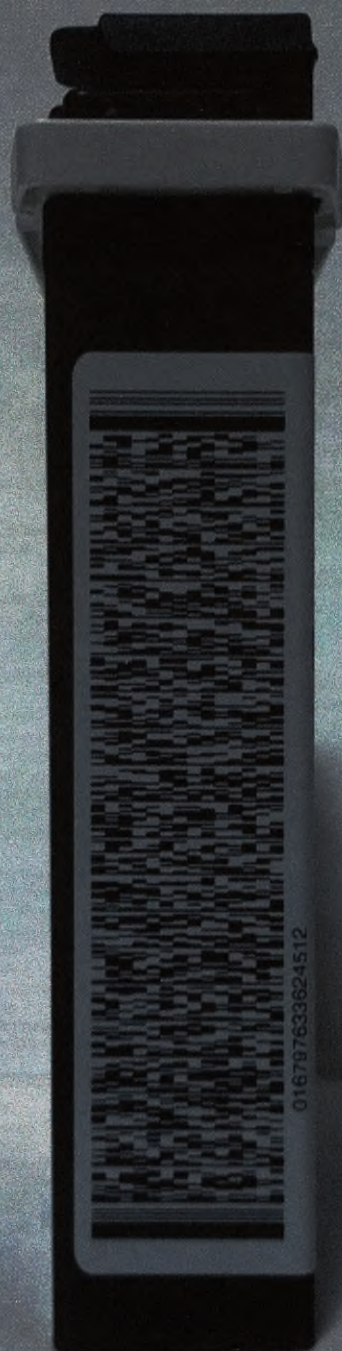

Инструкция на русском языке

09005803500V2.0

Elecys FT3 III

cobas®

REF	Q	Σ	SYSTEM
09005803190	09005803500	200	cobas e 411 cobas e 601 cobas e 602

Русский

Системная информация

Для анализатора cobas e 411: номер теста 2450

Для анализаторов cobas e 601 и cobas e 602: номер теста 813

Назначение

Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека.

Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e.

Теоретическое обоснование

Тиреоидные гормоны трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) выделяются в кровоток щитовидной железой и играют жизненно важную роль в регуляции скорости метаболизма в организме, оказывают влияние на работу сердечно-сосудистой системы, рост и обмен веществ в костной ткани, а также важны для нормального развития функций половых желез и нервной системы.¹

Т3 циркулирует в кровяном русле в виде равновесной смеси свободного и связанного с сывороточными белками гормонов. Свободный Т3 (FT3) является несвязанной и биологически активной формой, которая составляет всего 0,2-0,4 % от общего количества Т3. Остальная часть Т3 неактивна и связана с белками сыворотки крови, причем распределение Т3 между разными белками (тироксин-связывающий глобулин, преальбумин, альбумин) остается спорным вопросом.^{2,3,4,5}

Преимущество определения свободного Т3 заключается в том, что его уровень не зависит от изменений концентраций и связывающей способности этих сывороточных белков; поэтому дополнительное определение параметра связывания (тест поглощения тиреоидных гормонов, ТСГ) не требуется. Таким образом, определение свободного Т3 является полезным инструментом в рутинной клинической практике с целью диагностики состояния щитовидной железы. Определение свободного Т3 назначается в целях дифференциальной диагностики патологий щитовидной железы, для обнаружения различных форм гипертиреоза, а также для выявления у пациентов тиреотоксикоза с повышенным уровнем Т3.^{1,6,7}

Для оценки уровня свободного тиреоидного гормона доступно множество методов. В качестве референсного метода для стандартизации иммунологических методов, которые обычно применяются в рутинных диагностических целях, в основном используется прямое измерение FT4 и FT3 посредством равновесного диализа или ультрафильтрации.^{6,7}

В тесте Elecys FT3 III для определения уровня свободного трийодтиронина используется Т3-специфичное антитело, меченное рутениевым комплексом⁸.

a) Трис(2,2'-бипиридин)рутениевый(II)-комплекс (Ru(bpy)₃)²⁺

Принцип метода

Принцип конкуренции. Общая продолжительность проведения анализа: 18 минут.

- 1-я инкубация: 15 мкл образца и Т3-специфичное антитело, меченное рутениевым комплексом.
- 2-я инкубация: После добавления биотинилированного Т3 и микрочастиц, покрытых стрептавидином, происходит связывание свободных участков меченого антитела с образованием комплекса гаптен-антитело. Образовавшийся комплекс затем связывается с твердой фазой в результате взаимодействия биотина и стрептавидина.
- Реакционная смесь аспирируется в измерительную ячейку, где микрочастицы оседают на поверхность электрода в результате магнитного взаимодействия. Затем с помощью ProCell/ProCell M удаляются несвязавшиеся вещества. Далее приложенное к электроду напряжение вызывает хемилюминесцентную эмиссию, которая измеряется фотоумножителем.

- Результаты определяются с помощью 2-точечной калибровочной кривой, полученной для данного прибора, и референсной калибровочной кривой, данные которой предоставлены в штрих-коде реагента или e-штрих-коде.

Реагенты — рабочие растворы

Кассета с реагентами промаркирована как FT3 3.

- M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл;
Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант.
- R1 Анти-Т3-Ат-Ru(bpy)₃²⁺ (серая крышка), 1 флакон, 18 мл;
Моноклональное антитело к Т3 (овечье), меченное рутениевым комплексом, 18 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7,0; консервант.
- R2 Т3-биотин (черная крышка), 1 флакон, 18 мл;
Биотинилированный Т3 2,4 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7,0; консервант.

Меры предосторожности и предупреждения

Для in vitro диагностики для медицинских работников. Соблюдайте стандартные меры предосторожности, требуемые при обращении со всеми лабораторными реагентами.

Отходы из инфекционных отделений или микробиологических лабораторий:

Предупреждение: обращайтесь с отходами как с потенциальным биологически опасным материалом. Утилизируйте отходы в соответствии с утвержденными инструкциями и методиками.

Вредное воздействие на окружающую среду:

Применяйте все соответствующие местные правила в отношении безопасной утилизации.

Паспорт безопасности предоставляется профессиональному пользователю по запросу.

Этот набор содержит компоненты, классифицируемые следующим образом в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008:



Предупреждение

- H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи.

Меры предосторожности:

- P261 Старайтесь не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / аэрозоли.
- P272 Загрязненную рабочую одежду не следует выносить за пределы рабочего места.
- P280 Носите защитные перчатки.


Ответные действия:

- P333 + P313 При появлении раздражения кожи или сыпи: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
- P362 + P364 Снимите загрязненную одежду и постирайте ее перед следующим использованием.

Меры предосторожности при утилизации:

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов

Общий вид

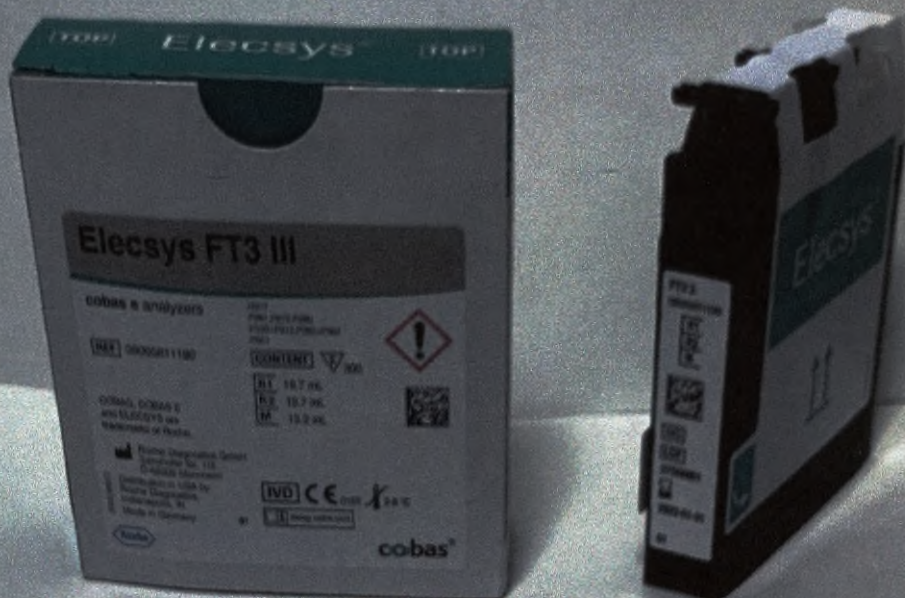

Elecys FT3

09005811500 V.1
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

English

Precautions and warnings

For in vitro diagnostic use

Precautions required for handling

Infectious or microbial waste

Warning: handle waste

according to accepted local

Environmental hazards

Apply all relevant local

Safety data sheet available

For USA: Caution: For use

of a physician.

This kit contains a

Regulation (EC) No



Warning

Elecys FT3

09005811500 V.1
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

Elecys FT3 III

09005811500 V.1
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

09005811501
dialog.roche.com

Not covered by the CE mark
USA

V informácii o výrobku a o jeho použití, navštívte prosím stránku uvedenou v príslušnom rámečku. Na tejto stránke nájdete buď verziu zde uvedenou alebo, je-li dostupná, jakoukoliv novější verzi platnou pro tento kód výrobku. Nemáte-li přístup k internetu, kontaktujte pro získání dokumentu zdarma Vaše místní zastoupení Roche.

Slovenaky

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia

Pre in vitro diagnostické použitie odborným zdravotníckym personálom.

Dodržiavajte štandardné bezpečnostné opatrenia platné pre prácu so všetkými laboratórnymi reagentami.

Infekčný alebo mikrobiálny odpad:

Varovanie: S odpadom zaobchádzajte ako s potenciálne biologicky nebezpečným materiálom. Odpad zlikvidujte podľa schválených laboratórných pokynov a postupov.

Environmentálne riziká: Tento kit obsahuje zložky klasifikované nasledovne podľa Smernice (EC)

Na určenie bezpečného spôsobu likvidácie použite všetky relevantné miestne predpisy týkajúce sa likvidácie.

Bezpečnostný list je pre odborných používateľov dostupný na požiadanie.

Pre USA: Pazar: Americký federálny zákon umožňuje predaj tohto zariadenia len na základe objednávky od lekára.

Táto príloha obsahuje zložky klasifikované nasledovne podľa Smernice (EC)

Ссылка для скачивания инструкции

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Код продукта, наряду с соответствующей версией документа

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов

Elecsys FT3 III

cobas e analyzers

H317
P261, P272, P280
P333+P313, P362+P364
P501

REF 09005811190

CONTENT Σ 300

R1	19.7 mL
R2	19.7 mL
M	13.2 mL

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

071020279001(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

IVD **CE** 0123  2-8 °C

 dialog.roche.com

01



cobas[®]

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов

Elecsys FT3 III

REF 09005811190


For USA: CONTENT

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Monoclonal anti-T3-antibody (sheep) labeled
with ruthenium complex 18 ng/mL
- R2 Biotinylated T3 2.4 ng/mL



Rx only

01

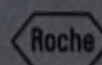

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов

Макет маркировки на русском языке

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей
иммунохимических cobas e (Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4423 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH"), Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО

«Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2 Тел: +7 495

229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2.dia@roche.com

Кат. номер 09005811190

Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys FT3 III cobas e analyzers/ FT3 3), 300 тестов



Инструкция на русском языке

Elecsys FT3 III

cobas®

REF			SYSTEM
09005811190	09005811500	300	cobas e 402 cobas e 801

Русский

Системная информация

Краткое название	ACN (номер теста)
FT3 3	10220

Назначение

Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека.

Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e.

Теоретическое обоснование

Тиреоидные гормоны трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) выделяются в кровоток щитовидной железой и играют жизненно важную роль в регуляции скорости метаболизма в организме, оказывают влияние на работу сердечно-сосудистой системы, рост и обмен веществ в костной ткани, а также важны для нормального развития функций половых желез и нервной системы.¹

Т3 циркулирует в кровяном русле в виде равновесной смеси свободного и связанного с сывороточными белками гормонов. Свободный Т3 (FT3) является несвязанной и биологически активной формой, которая составляет всего 0,2-0,4 % от общего количества Т3. Остальная часть Т3 неактивна и связана с белками сыворотки крови, причем распределение Т3 между разными белками (тироксин-связывающий глобулин, преальбумин, альбумин) остается спорным вопросом.^{2,3,4,5}

Преимущество определения свободного Т3 заключается в том, что его уровень не зависит от изменений концентраций и связывающей способности этих сывороточных белков; поэтому дополнительное определение параметра связывания (тест поглощения тиреоидных гормонов, ТСГ) не требуется. Таким образом, определение свободного Т3 является полезным инструментом в рутинной клинической практике с целью диагностики состояния щитовидной железы. Определение свободного Т3 назначается в целях дифференциальной диагностики патологий щитовидной железы, для обнаружения различных форм гипертиреоза, а также для выявления у пациентов тиреотоксикоза с повышенным уровнем Т3.^{1,6,7}

Для оценки уровня свободного тиреоидного гормона доступно множество методов. В качестве референсного метода для стандартизации иммунологических методов, которые обычно применяются в рутинных диагностических целях, в основном используется прямое измерение FT4 и FT3 посредством равновесного диализа или ультрафильтрации.^{6,7}

В тесте Elecsys FT3 III для определения уровня свободного трийодтиронина используется Т3-специфичное антитело, меченное рутениевым комплексом⁸.

а) Трис(2,2'-би(трифенил)рутеней)(II)-комплекс (Ru(bpy)₃²⁺)

Принцип метода

Принцип конкуренции. Общая продолжительность проведения анализа: 18 минут.

- 1-я инкубация: 9 мкл образца и Т3-специфичное антитело, меченное рутениевым комплексом.
- 2-я инкубация: после добавления биотинилированного Т3 и микрочастиц, покрытых стрептавидином, происходит связывание свободных участков меченного антитела с образованием комплекса гаптен-антитело. Образовавшийся комплекс затем связывается с твердой фазой в результате взаимодействия биотина и стрептавидина.
- Реакционная смесь аспирируется в измерительную ячейку, где микрочастицы оседают на поверхность электрода в результате магнитного взаимодействия. Затем с помощью ProCell II M удаляются несвязавшиеся вещества. Затем приложенное к электроду напряжение вызывает хемилюминесцентную эмиссию, которая измеряется фотоумножителем.

- Результаты определяются с помощью 2-точечной калибровочной кривой, полученной для данного инструмента, и референсной калибровочной кривой, данные которой предоставляются через cobas link.

Реагенты — рабочие растворы

Кассета cobas e промаркирована как FT3 3.

- M Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 1 флакон, 13,2 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0,72 мг/мл; консервант.
- R1 Анти-Т3-Ат-Ru(bpy)₃²⁺, 1 флакон, 19,7 мл: Моноклональное антитело к Т3 (овечье), меченное рутениевым комплексом, 18 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7,0; консервант.
- R2 Т3-биотин, 1 флакон, 19,7 мл: Биотинилированный Т3 2,4 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7,0; консервант.

Меры предосторожности и предупреждения

Для in vitro диагностики для медицинских работников. Соблюдайте стандартные меры предосторожности, требуемые при обращении со всеми лабораторными реагентами.

Отходы из инфекционных отделений или микробиологических лабораторий:

Предупреждение: обращайтесь с отходами как с потенциально биологически опасным материалом. Утилизируйте отходы в соответствии с утвержденными инструкциями и методиками.

Вредное воздействие на окружающую среду:

Применяйте все соответствующие местные правила в отношении безопасной утилизации.

Паспорт безопасности предоставляется профессиональному пользователю по запросу.

Этот набор содержит компоненты, классифицируемые следующим образом в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008:



Предупреждение

H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи.

Меры предосторожности:

- P261 Старайтесь не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / аэрозоли.
- P272 Загрязненную рабочую одежду не следует выносить за пределы рабочего места.
- P280 Носите защитные перчатки.

Ответные действия:

- P333 + P313 При появлении раздражения кожи или сыпи: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
- P362 + P364 Снимите загрязненную одежду и постирайте ее перед следующим использованием.

Меры предосторожности при утилизации:

- P501 Утилизировать содержимое/контейнер на соответствующем заводе по утилизации отходов.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
20 листа (ов)

М.А. Моржаченко

№ 006 от
11.02.2022

