


**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод»
(ФГУП «Московский эндокринный завод»)**

УТВЕРЖДАЮ

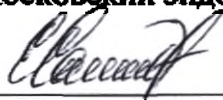

**Начальник Управления по
внедрению и регистрации
лекарственных препаратов ФГУП
«Московский эндокринный завод»**


Е.П. Самойлова
« 08 » октября 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый по
ТУ 32.50.50-011-40393587-2021**

Настоящие фотографические изображения сделаны для медицинского изделия «Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021» (далее – «комплект»), упаковки и маркировки комплекта.

Наименования рисунков и пояснения

Рисунок 1 – Рубашка из комплекта. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 2 – Штаны из комплекта. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 3 – Халат из комплекта. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 4 – Шапочка-шлем с пелериной из комплекта варианта исполнения № 1. Внешний вид одинаковый для всех материалов.

Рисунок 5 – Шапочка-шлем с запахом из комплекта варианта исполнения № 2. Внешний вид одинаковый для всех материалов.

Рисунок 6 – Бахилы из комплекта. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 7 – Общий вид комплекта в сборе. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 8 – Комплектность комплекта варианта исполнения № 1: 1. Рубашка; 2. Брюки; 3. Халат; 4. Шапочка-шлем с пелериной; 5. Бахилы.

Рисунок 9 – Комплектность комплекта варианта исполнения № 2: 1. Рубашка; 2. Брюки; 3. Халат; 4. Шапочка-шлем с запахом; 5. Бахилы.

Рисунок 10 – Комплектность потребительской упаковки: 1. Комплект; 2. Ярлык потребительский; 3. Потребительская упаковка. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 11 – Комплектность групповой упаковки: 1. Комплект одного варианта исполнения, упакованный в потребительскую упаковку; 2. Инструкция по применению; 3. Ярлык групповой; 4. Групповая упаковка. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 12 – Комплектность транспортной упаковки: 1. Комплект одного варианта исполнения, упакованный в потребительскую и групповую упаковки; 2. Упаковочный лист; 3. Этикетка транспортная; 4. Транспортная упаковка. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 13 – Потребительская упаковка. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 14 – Групповая упаковка. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

Рисунок 15 – Транспортная упаковка. Внешний вид одинаковый для всех вариантов исполнения комплекта и для всех материалов.

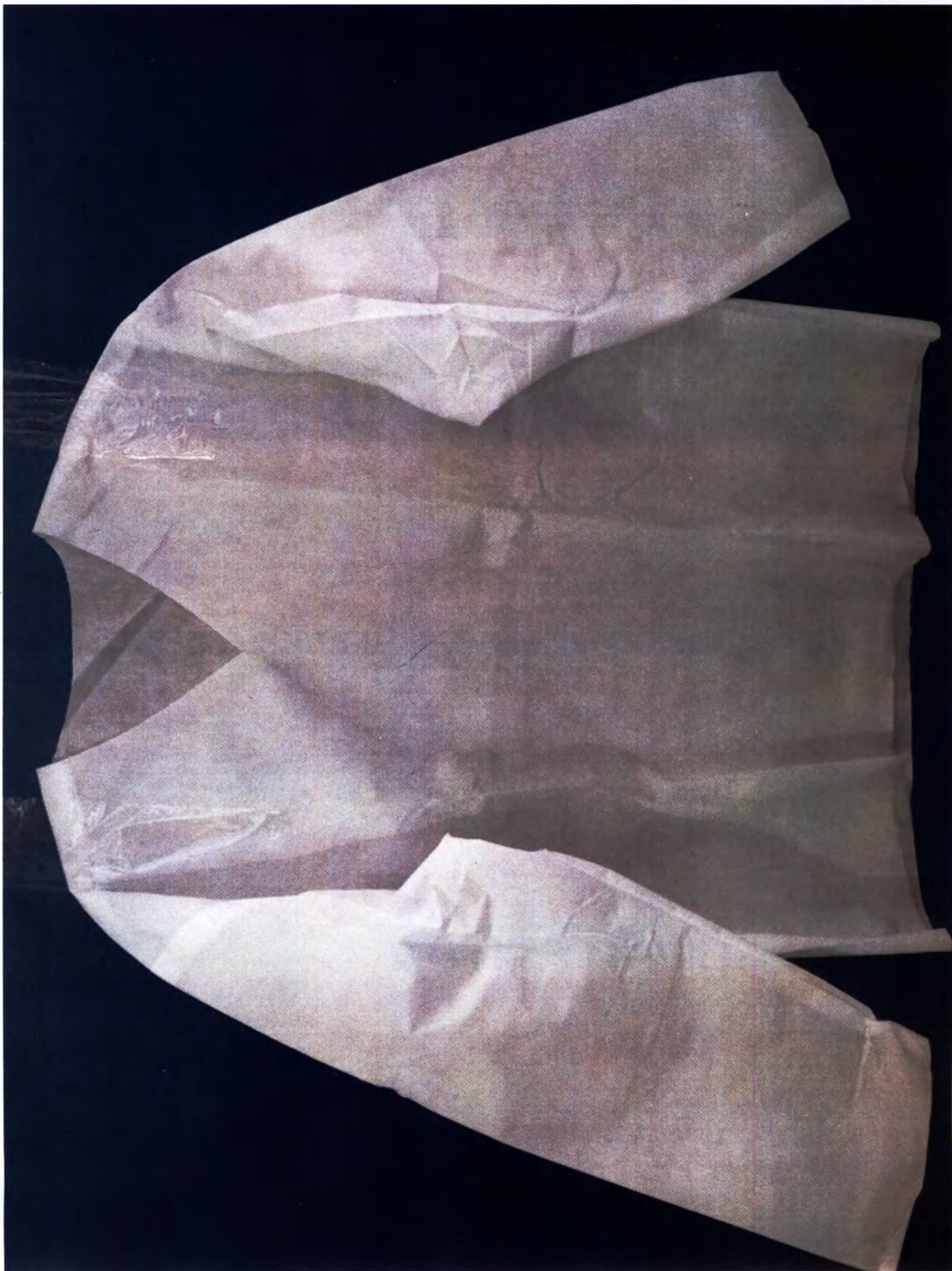


Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

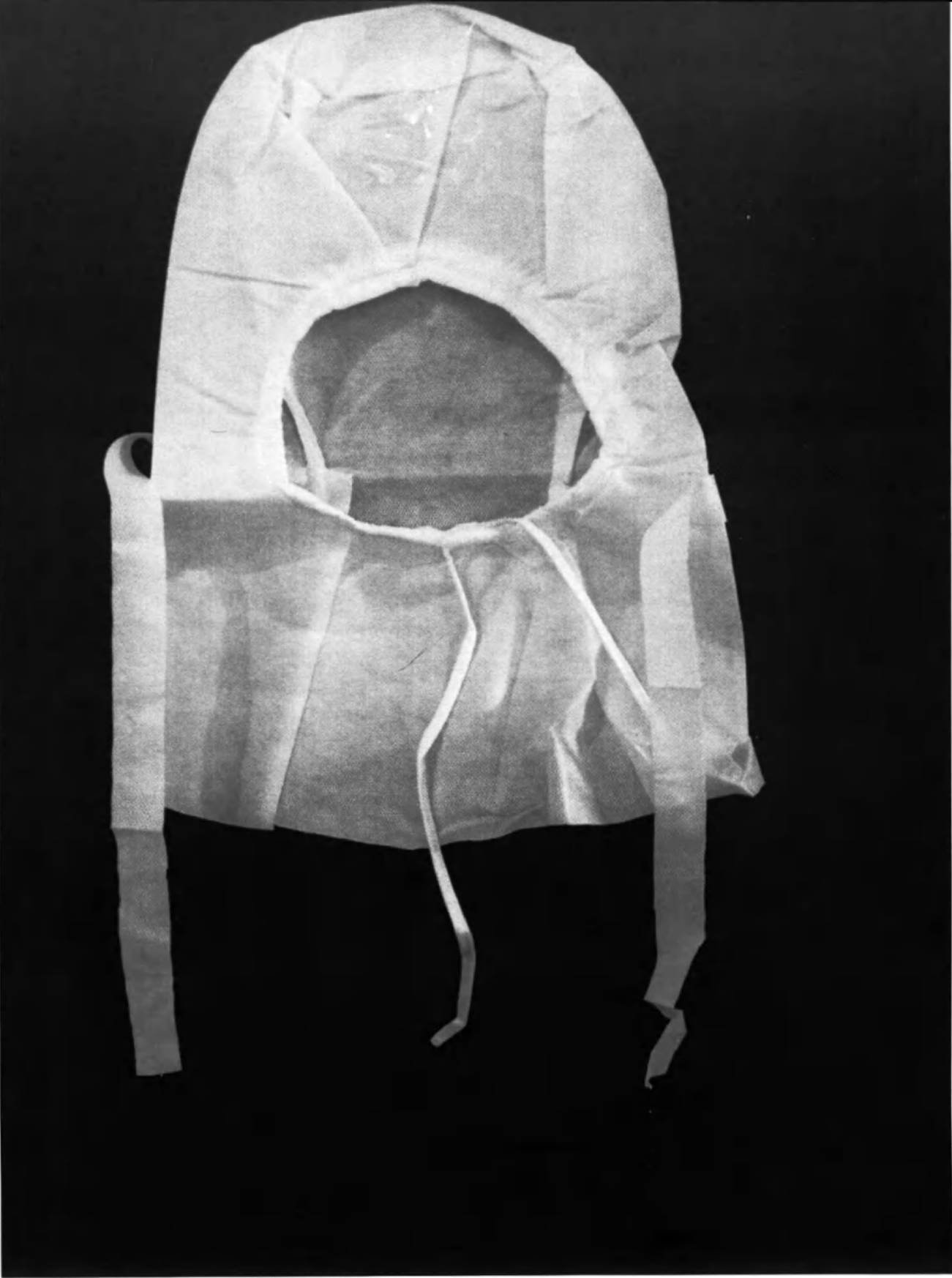


Рисунок 4



Рисунок 5

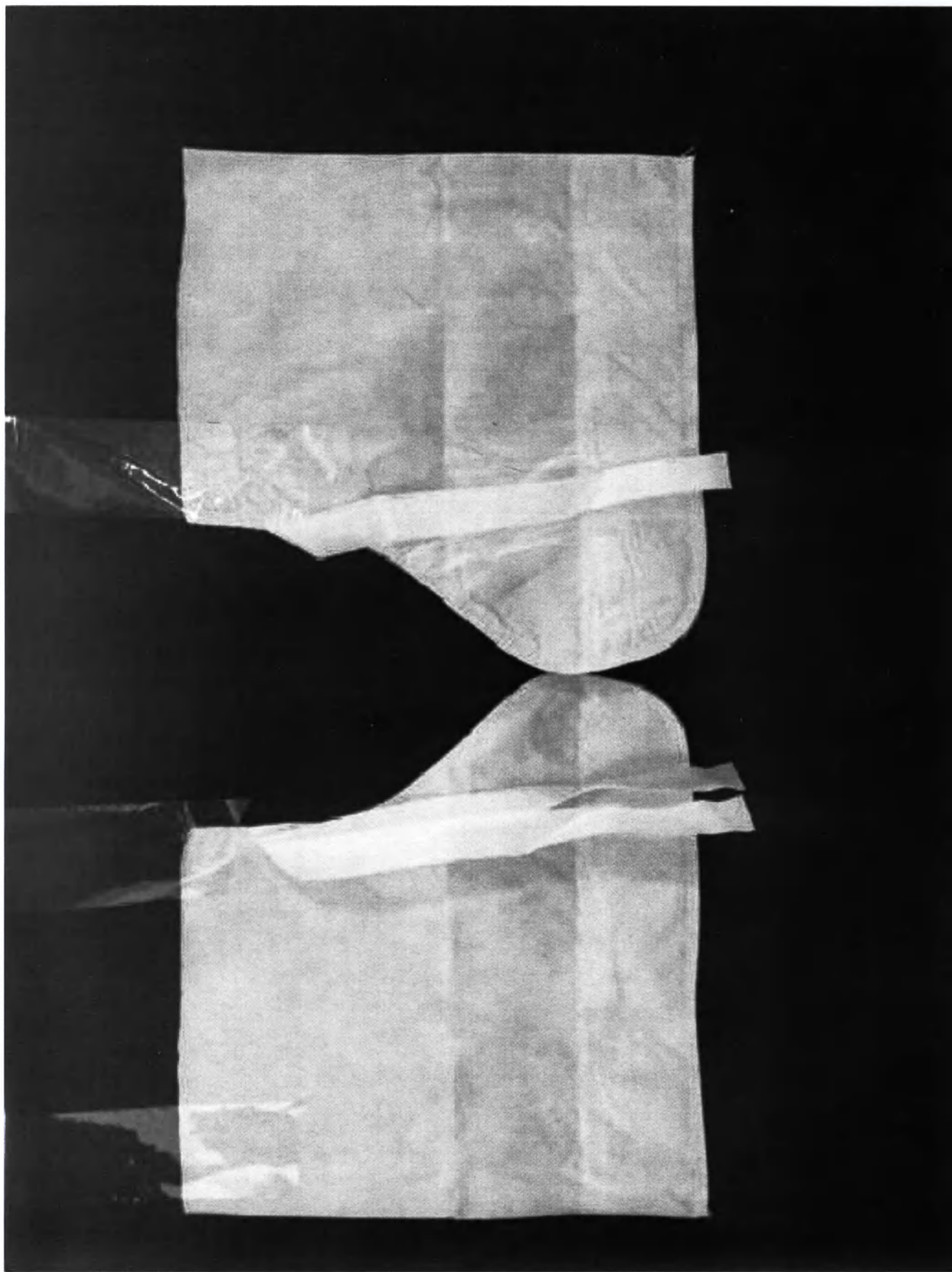


Рисунок 6



Рисунок 7

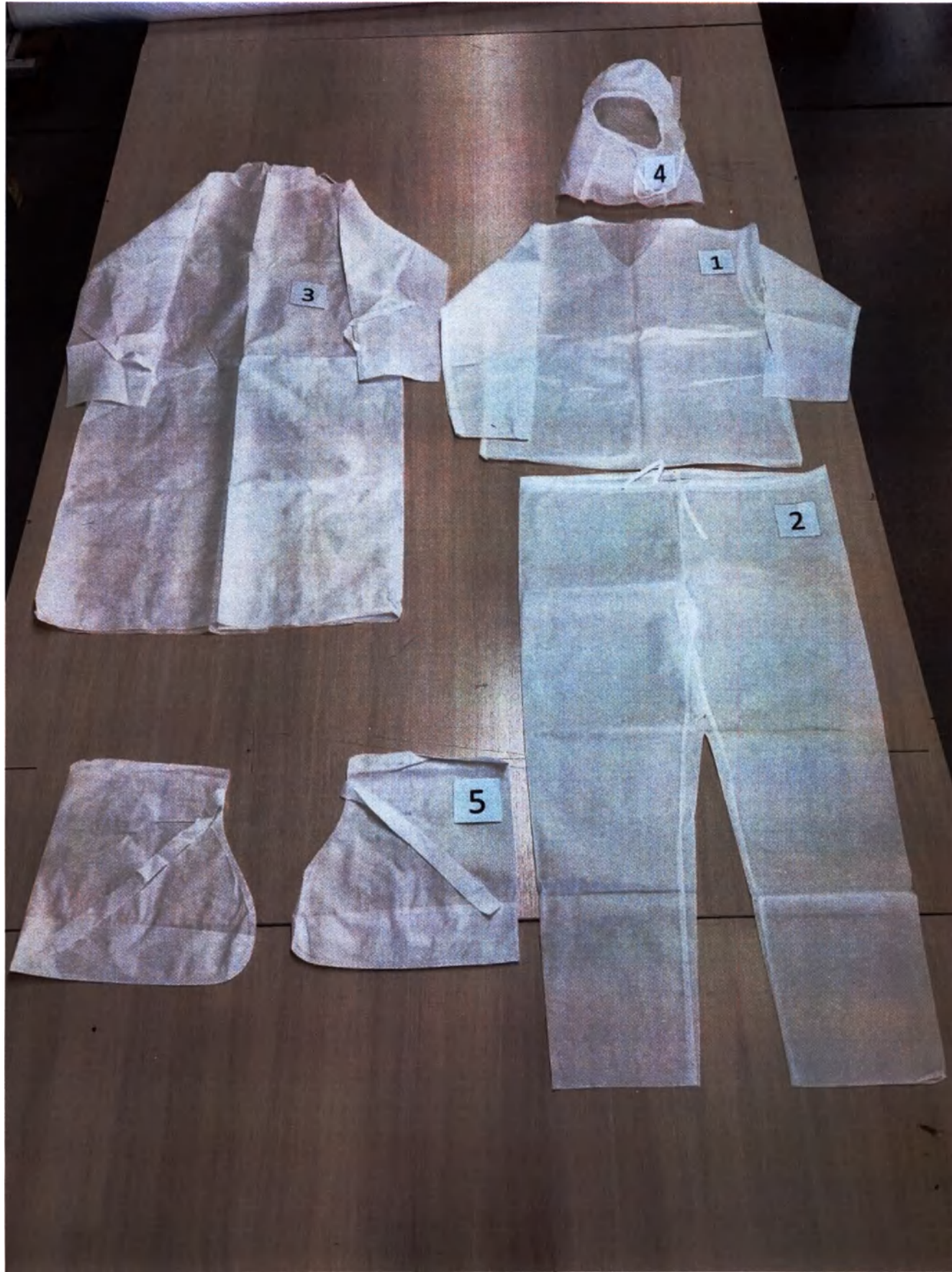


Рисунок 8



Рисунок 9



Рисунок 10



Рисунок 11



Рисунок 12



Рисунок 13



Рисунок 14



Рисунок 15

13
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 18 листа(ов).

Начальник Управления по
внедрению и регистрации ЛП ФГУП
«Московский эндокринный завод»

Е.П. Самойлова

« 06 » 04 2022 года

М.П.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Е.П. Самойлова

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод»
(ФГУП «Московский эндокринный завод»)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по
внедрению и регистрации
лекарственных препаратов ФГУП
«Московский эндокринный завод»

« 14 февраля 2022 г. Е.П. Самойлова



ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый по
ТУ 32.50.50-011-40393587-2021

6 

9 **Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый**
по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021

15 **Потребительский ярлык для потребительской упаковки**
Вариант исполнения № 1

Комплектность изделия

№ п/п	Наименование элемента комплекта
1	Рубашка – 1 шт.
2	Брюки – 1 шт.
3	Халат – 1 шт.
4	Шапочка-шлем с пелериной – 1 шт.
5	Бахилы – 1 пара

17 **Назначение**
Для ограничения обмена инфекционными агентами между бессимптомными носителями или пациентами с клиническими симптомами и персоналом во время профилактики, диагностики и лечения, а также для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противоэпидемических мероприятий и дезинфекционных работ путем создания барьера, препятствующего распространению и передаче инфекции.

18 **Показания к применению**
Ограничение обмена инфекционными агентами между бессимптомными носителями или пациентами с клиническими симптомами и персоналом во время профилактики, диагностики и лечения.

19 **Противопоказания к применению**
Индивидуальная непереносимость материалов комплекта (наличие предрасположенности к аллергии).

20 **Побочные эффекты**
Возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы комплекта.

21 **Область применения**
Медицинские учреждения, общественные и торговые организации, социальные учреждения, транспортные средства.

23 **Указания по применению в сокращенном виде**
Надевать комплект в следующей последовательности: рубашка, брюки, бахилы, шапочка-шлем, халат.
Завязывать завязки.
Чтобы снять комплект, необходимо развязать завязки.
Снимать комплект в следующей последовательности: халат, шапочка-шлем, бахилы, брюки, рубашка.


24 **Условия хранения и транспортирования**
Комплект в упакованном виде должен храниться при воздействии климатических факторов для условий хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, без воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Комплект в упакованном виде должен транспортироваться при воздействии климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и при относительной влажности не более 80 %.

26 **Требования утилизации в сокращенном виде**
Не использованный по назначению комплект, потребительская упаковка комплекта и комплект с истекшим сроком хранения, а также с поврежденной потребительской упаковкой, относится к медицинским отходам класса «А» и в соответствии с СанПиН 2.1.3684 утилизируется в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованный комплект относится к медицинским отходам класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

31 **Предупреждение**
Не использовать при поврежденной упаковке.

32 **Предупреждение**
Необходимо утилизировать комплект в случае обнаружения неисправностей комплекта, определяемых по внешним признакам, которые могут влиять на безопасность комплекта, в том числе истекший срок хранения и механические повреждения комплекта и потребительской упаковки.

33 **Предупреждение**
Использованный комплект не утилизировать как бытовые отходы.

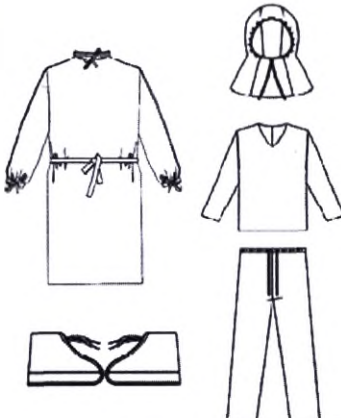12 

29 **Нетокично.**
Изделие однократного применения, не подлежит повторному использованию.

27 **Изделие нестерильно,**
не подлежит стерилизации перед использованием.

28 **Состав** Полипропилен.

22 **Размер** Стандартный.

11 **Регистрационное удостоверение №** от

34 **Производитель, адрес производителя для принятия претензий от потребителей и направления сообщений о нежелательных событиях**
ФГУП «Московский эндокринный завод»,
«Московский эндокринный завод»
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25.
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>;
e-mail: mez@endopharm.ru

1 **Адреса места производства**
1. ООО «Одинцовская швейная фабрика», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 10.
2. ООО «Швейная фабрика лидер», Россия, 301608, Тульская область, г. Узловая, ул. Горькая, д. 7.
3. ООО «МТМ АТЕЛБЕ», Россия, 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 36.
4. АО «Иноватор», Россия, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 5, этаж 6, помещ. 10.
Адрес места производства комплекта указывается буквами в номере партии.
1 – ОШФ, 2 – ШФЛ, 3 – МТМ, 4 – АОИ.

5 **№ партии:**
Дата производства:
Номер упаковщика:

42 **Комплектность потребительской упаковки**
Комплект – 1 шт.;
Ярлык потребительский – 1 шт.;
Потребительская упаковка – 1 шт.

13 **Срок хранения** – 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения.

14 **Место зарезервировано для штрихового кода**

38

37

36

30

35

27

28

41

39

6

9

15

17

18

19

20

21

23

24

26

31

32

33

Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый
 по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021-
 Вариант исполнения № 1
 Групповой ярлык для групповой упаковки

Комплектность изделия

№ п/п	Наименование изделия комплекта
1	Рубашка – 1 шт.
2	Брюки – 1 шт.
3	Халат – 1 шт.
4	Шапочка-шлем с пачерной – 1 шт.
5	Бамилы – 1 пара

Описание:
 Для ограничения обмена инфекционными агентами между бесконтактными носителями или пациентами с инфекционными симптомами и персоналом во время профилактических, диагностических и лечебных.

Показания к применению:
 Ограничение обмена инфекционными агентами между бесконтактными носителями или пациентами с инфекционными симптомами и персоналом во время профилактических, диагностических и лечебных.

Противопоказания к применению:
 Индивидуальная непереносимость материалов комплекта (аллергические проявления).

Побочные эффекты:
 Возможны индивидуальные аллергические реакции на материалы комплекта.

Область применения:
 Медицинские учреждения, общественные и торговые организации, социальные учреждения, транспортные средства.

Упаковка по применению и маркировке:
 Упаковка комплекта в следующей последовательности: халат, шапочка-шлем, бамилы, рубашка, брюки.

Условия хранения и транспортировки:
 Комплект в упакованном виде должен храниться при воздействии климатических факторов для условий хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, без воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Комплект в упакованном виде должен транспортироваться при воздействии климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и при относительной влажности не более 80 %.

Требования к упаковке:
 Не использовать по назначению комплект, потребительская упаковка которого и комплект с истекшим сроком хранения, а также с поврежденной потребительской упаковкой, описанной в медицинской одежде класса «А» и в соответствии с СанПиН 2.1.3.684 утилизируется в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.

Использованный комплект относится к медицинским отходам класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3.684.

Предупреждение:
 Не использовать при поврежденной упаковке.

Предупреждение:
 Необходимо утилизировать комплект в случае обнаружения неисправностей комплекта, описанных по внешним признакам, которые могут влиять на безопасность комплекта, в том числе истекший срок хранения и незначительные повреждения комплекта и потребительской упаковки.

Предупреждение:
 Исполнительный комплект утилизируется как бытовые отходы.

Назначение:
 Медицинское назначение, не подлежит повторному использованию.
 Не подлежит стерилизации перед использованием.

Состав: Полипропилен.

Размер: Стандартный.

Регистрационное удостоверение № _____ **от** _____

Производитель: Адрес производителя для получения претензий от потребителей и направления сообщений о индивидуальных сообщениях федеральным государственным уполномоченным надзорным органом:
 «Московский федеральный завод»
 ООО «Московский федеральный завод»
 Россия, 189051, г. Москва, ул. Новоэлевская, д. 25.
 Тел./Факс: (495) 679-00-50/911-42-10
 E-mail: info@mosfedzavod.ru

Адреса мест производства:
 1. ООО «Индустриальный завод» фабрика, Россия, 145002, Московская область, с. Орехово, ул. Западная, д. 9, стр. 18.
 2. ООО «Центральная фабрика тканей», Россия, 301608, Тульская область, с. Угловое, ул. Горького, д. 7.
 3. ООО «МТМ АТЕВЭ», Россия, 620072, Свердловская область, с. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 50.
 4. АО «Ижевский завод», Россия, 124460, с. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 5, этаж 6, пом. 10.
 Адрес места производства комплекта указывается буквами в номере партии: 1 – ОИИ, 2 – ИИИ, 3 – МТМ, 4 – АИИ.

№ партии: _____

Дата производства: _____

Номер упаковочника: _____

Количество групповой упаковки:
 1. Комплект одного варианта исполнения – 20 шт.;
 2. Ярлык потребительский – 20 шт.;
 3. Потребительская упаковка – 20 шт.;
 4. Инструкция по применению – 1 шт.;
 5. Ярлык групповой – 1 шт.;
 6. Групповая упаковка – 1 шт.

Срок хранения: – 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения.

7

8

10

12

29

27

28

22

11

34

1

2

3

4

5

42

13

14

40

16

25

+35 °C

+10 °C

Место зарезервировано для штрихового кода

38

37

36

30

35

27

28

41

39

Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый
по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021

Вариант исполнения № 2

Потребительский ярлык для потребительской упаковки

Комплектность изделия

№ п/п	Наименование элемента комплекта
1	Рубашка – 1 шт.
2	Брюки – 1 шт.
3	Халат – 1 шт.
4	Шапочка-шлем с запахом – 1 шт.
5	Бахилы – 1 пара

Назначение
Для ограничения обмена инфекционными агентами между бессимптомными носителями или пациентами с клиническими симптомами и персоналом во время профилактики, диагностики и лечения, а также для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противоэпидемических мероприятий и дезинфекционных работ путем создания барьера, препятствующего распространению и передаче инфекции.

Показания к применению
Ограничение обмена инфекционными агентами между бессимптомными носителями или пациентами с клиническими симптомами и персоналом во время профилактики, диагностики и лечения.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов комплекта (наличие предрасположенности к аллергии).

Побочные эффекты
Возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы комплекта.

Область применения
Медицинские учреждения, общественные и торговые организации, социальные учреждения, транспортные средства.

Указания по применению в сокращенном виде
Надевать комплект в следующей последовательности: рубашка, брюки, бахилы, шапочка-шлем, халат.
Завязывать завязки.
Чтобы снять комплект, необходимо развязать завязки.
Снимать комплект в следующей последовательности: халат, шапочка-шлем, бахилы, брюки, рубашка.

Условия хранения и транспортирования
Комплект в упакованном виде должен храниться при воздействии климатических факторов для условий хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, без воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
Комплект в упакованном виде должен транспортироваться при воздействии климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и при относительной влажности не более 80 %.

Требования утилизации в сокращенном виде
Не использованный по назначению комплект, потребительская упаковка комплекта и комплект с истекшим сроком хранения, а также с поврежденной потребительской упаковкой, относится к медицинским отходам класса «А» и в соответствии с СанПиН 2.1.3684 утилизируется в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
Использованный комплект относится к медицинским отходам класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

Предупреждение
Не использовать при поврежденной упаковке.

Предупреждение
Необходимо утилизировать комплект в случае обнаружения неисправностей комплекта, определяемых по внешним признакам, которые могут влиять на безопасность комплекта, в том числе истекший срок хранения и механические повреждения комплекта и потребительской упаковки.

Предупреждение
Использованный комплект не утилизировать как бытовые отходы.

Нетокично.
Изделие однократного применения, не подлежит повторному использованию.
Изделие нестерильно, не подлежит стерилизации перед использованием.

Состав Полипропилен.

Размер Стандартный.

Регистрационное удостоверение № от

Производитель, адрес производителя для принятия претензий от потребителей и направления сообщений о нежелательных событиях
ФГУП «Московский эндокринный завод»
«Московский эндокринный завод»
Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25.
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
http://www.endopharm.ru;
e-mail: mez@endopharm.ru

Адреса места производства
1. ООО «Одинцовская швейная фабрика», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 10.
2. ООО «Швейная фабрика лидер», Россия, 301608, Тульская область, г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 7.
3. ООО «МТМ АТЕЛЬЕ», Россия, 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 36.
4. АО «Инноватор», Россия, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 5, этаж 6, помещ. 10.
Адрес места производства комплекта указывается буквами в номере партии.
1 – ОШФ, 2 – ШФЛ, 3 – МТМ, 4 – АОИ.

№ партии:
Дата производства:
Номер упаковочника:

Комплектность потребительской упаковки
Комплект – 1 шт.;
Ярлык потребительский – 1 шт.;
Потребительская упаковка – 1 шт.

Срок хранения – 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения.

Место зарезервировано для штрихового кода

38

37

36

30

35

27

28

41

39

Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый
 по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021
 • Вариант исполнения № 2
 Групповой ярлык для групповой упаковки •

Комплектность изделия

№ п/п	Наименование элемента комплекта
1	Рубашка – 1 шт.
2	Брюки – 1 шт.
3	Халат – 1 шт.
4	Шапочка-шлем с запахом – 1 шт.
5	Бахилы – 1 пара

Назначение
 Для ограничения обмена инфекционными агентами между бессимптомными носителями или пациентами с клиническими симптомами и персоналом во время профилактики, диагностики и лечения, а также для использования в качестве защитной одежды медицинского персонала при выполнении противоэпидемических мероприятий и дезинфекционных работ путем создания барьера, препятствующего распространению и передаче инфекции.

Показания к применению
 Ограничение обмена инфекционными агентами между бессимптомными носителями или пациентами с клиническими симптомами и персоналом во время профилактики, диагностики и лечения.

Противопоказания к применению
 Индивидуальная непереносимость материалов комплекта (наличие предрасположенности к аллергии).

Побочные эффекты
 Возможна индивидуальная аллергическая реакция на материалы комплекта.

Область применения
 Медицинские учреждения, общественные и торговые организации, социальные учреждения, транспортные средства.

Указания по применению в сокращенном виде
 Надевать комплект в следующей последовательности: рубашка, брюки, бахилы, шапочка-шлем, халат.
 Завязывать завязки.
 Чтобы снять комплект, необходимо развязать завязки.
 Снимать комплект в следующей последовательности: халат, шапочка-шлем, бахилы, брюки, рубашка.

Условия хранения и транспортирования
 Комплект в упакованном виде должен храниться при воздействии климатических факторов для условий хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, без воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
 Комплект в упакованном виде должен транспортироваться при воздействии климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и при относительной влажности не более 80 %.

Требования утилизации в сокращенном виде
 Не использованный по назначению комплект, потребительская упаковка комплекта и комплект с истекшим сроком хранения, а также с поврежденной потребительской упаковкой, относится к медицинским отходам класса «А» и в соответствии с СанПиН 2.1.3.684 утилизируется в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов.
 Использованный комплект относится к медицинским отходам класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3.684.

Предупреждение
 Не использовать при поврежденной упаковке.

Предупреждение
 Необходимо утилизировать комплект в случае обнаружения неисправностей комплекта, определенных по внешним признакам, которые могут влиять на безопасность комплекта, в том числе истекший срок хранения и механические повреждения комплекта и потребительской упаковки.

Предупреждение
 Использованный комплект не утилизировать как бытовые отходы.

Нетокично.
 Изделие однократного применения, не подлежит повторному использованию.
 Изделие нестерильно, не подлежит стерилизации перед использованием.

Состав Полипропилен.

Размер Стандартный.

Регистрационное удостоверение № от

Производитель, адрес производителя для принятия претензий от потребителей и направления сообщений о нежелательных событиях
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод», ФГУП «Московский эндокринный завод»
 Россия, 109052, г. Москва, ул. Новоохловская, д. 25.
 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>;
 e-mail: mez@endopharm.ru

Адреса места производства
 1. ООО «Одинцовская швейная фабрика», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 10.
 2. ООО «Швейная фабрика лидера», Россия, 301608, Тульская область, г. Узловая, ул. Горничная, д. 7.
 3. ООО «МТМ АТЕЛЪ», Россия, 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 36.
 4. АО «Иноватор», Россия, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 5, этаж 6, помещ. 10.
 Адрес места производства комплекта указывается буквами в номере партии: 1 – ОШФ, 2 – ШФЛ, 3 – МТМ, 4 – АОИ.

№ партии:
 Дата производства:
 Номер упаковочника:

Комплектность групповой упаковки
 1. Комплект одного варианта исполнения – 20 шт.;
 2. Ярлык потребительский – 20 шт.;
 3. Потребительская упаковка – 20 шт.;
 4. Инструкция по применению – 1 шт.;
 5. Ярлык групповой – 1 шт.;
 6. Групповая упаковка – 1 шт.

Срок хранения – 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения.

Место зарезервировано для штрихового кода

38

37

36

30

35

27

28

41

39

Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый
по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021. Вариант исполнения № 1
Транспортная этикетка для картонной коробки

Комплектность изделия

№ п/п	Наименование элемента комплекта
1	Рубашка – 1 шт.
2	Брюки – 1 шт.
3	Халат – 1 шт.
4	Шапочка-шлем с пелеринкой – 1 шт.
5	Бахилы – 1 пара

Условия хранения и транспортирования

Комплект в упакованном виде должен храниться при воздействии климатических факторов для условий хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, без воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Комплект в упакованном виде должен транспортироваться при воздействии климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и при относительной влажности не более 80 %.

Требования утилизации в сокращенном виде

Не использованный по назначению комплект, потребительская упаковка комплекта и комплект с истекшим сроком хранения, а также с поврежденной потребительской упаковкой, относится к медицинским отходам класса «А» и в соответствии с СанПиН 2.1.3684 утилизируется в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов. Использованный комплект относится к медицинским отходам класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

Изделие однократного применения, не подлежит повторному использованию.

Изделие нестерильно, не подлежит стерилизации перед использованием.

Состав Полипропилен.

Размер Стандартный.

Предупреждение
Использованный комплект не утилизировать как бытовые отходы.



Производитель, адрес производителя для принятия претензий от потребителей и направления сообщений в исполнительные органы
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»,
 ФГУП «Московский эндокринный завод»
 Россия, 109052, г. Москва, ул. Новослободская, д. 25.
 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
 http://www.endorpharm.ru;
 e-mail: muez@endorpharm.ru

Адреса мест производства

1. ООО «Одноразовая швейная фабрика», Россия, 143002, Московская область, с. Одиноково, ул. Западная, д. 9, стр. 10.
 2. ООО «Швейная фабрика лидера», Россия, 501608, Тульская область, с. Угловое, ул. Горняцкая, д. 7.
 3. ООО «МТМ АТЕЛЪЕ», Россия, 620072, Свердловская область, с. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 36.
 4. АО «Миниматор», Россия, 124460, г. Москва, с. Зеленоград, пр-кт Гинерова Александра, д. 5, этаж 6, помещ. 10.
- Адрес места производства комплекта указывается буквами в номере партии: 1 – ОЦФ, 2 – ШЛФ, 3 – МТМ, 4 – АОМ.

Регистрационное удостоверение
 № от

№ партии:

Дата производства:

Комплектность транспортной упаковки

1. Комплект одного варианта исполнения – 20 шт.;
2. Ярлык потребительский – 20 шт.;
3. Потребительская упаковка – 20 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;
5. Ярлык групповой – 1 шт.;
6. Групповая упаковка – 1 шт.;
7. Упаковочный лист – 1 шт.;
8. Этикетка транспортная – 1 шт.;
9. Транспортная упаковка – 1 шт.

Срок хранения – 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения.

Место зарезервировано
 для штрихового кода



28

26

27

25

22

23

Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый
по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021. Вариант исполнения № 2
• Транспортная этикетка для картонной коробки

Комплектность изделия

№ п/п	Наименование элемента комплекта
1	Рубашка – 1 шт.
2	Брюки – 1 шт.
3	Халат – 1 шт.
4	Шапочка-шлем с запахом – 1 шт.
5	Бахилы – 1 пара

Условия хранения и транспортирования

Комплект в упакованном виде должен храниться при воздействии климатических факторов для условий хранения 1 по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности не более 80 %, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, без воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.
 Комплект в упакованном виде должен транспортироваться при воздействии климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и при относительной влажности не более 80 %.

Требования к утилизации в сокращенном виде

Не использованный по назначению комплект, потребительская упаковка комплекта и комплект с истекшим сроком хранения, а также с поврежденной потребительской упаковкой, относится к медицинским отходам класса «А» и в соответствии с СанПиН 2.1.3684 утилизируется в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов. И использованный комплект относится к медицинским отходам класса «Б» и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

• Изделие однократного применения, не подлежит повторному использованию.

• Изделие нестерильно, не подлежит стерилизации перед использованием.

• Состав Полипропилен.

• Размер Стандартный.

Предупреждение

Использованный комплект не утилизировать как бытовые отходы.



Производителю, адрес производителя для принятия претензий от потребителей и направления сообщений о нештатных событиях
 Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Московский эндокринный завод»,
 ФГУП «Московский эндокринный завод»
 Россия, 109052, г. Москва, ул. Новооскольская, д. 25.
 Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>;
 e-mail: mez@endopharm.ru

Адреса места производства

1. ООО «Одноразовая швейная фабрика», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 9, стр. 10.
 2. ООО «Швейная фабрика лидера», Россия, 301608, Тульская область, г. Узловая, ул. Горькая, д. 7.
 3. ООО «МТМ АТЕЛЬЕ», Россия, 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 36.
 4. АО «Инноватор», Россия, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д. 5, этаж 6, помещ. 10.
- Адрес места производства комплекта указывается буквами в номере партии: 1 – ОЦВФ, 2 – ШФЛ, 3 – МТМ, 4 – АОИ.

Регистрационное удостоверение
 № _____ от _____

№ партии:

Дата производства:

Комплектность транспортной упаковки

1. Комплект одного варианта исполнения – 20 шт.
2. Ярлык потребительский – 20 шт.
3. Потребительская упаковка – 20 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.
5. Ярлык групповой – 1 шт.
6. Групповая упаковка – 1 шт.
7. Упаковочный лист – 1 шт.
8. Этикетка транспортная – 1 шт.
9. Транспортная упаковка – 1 шт.

Срок хранения – 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения.

Место зарезервировано
 для штрихового кода



28

26

27

25

22

23

2

1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

для транспортной упаковки

3

4

5

6

7

8



Производитель:
ФГУП «Московский эндокринный завод»

Комплект медицинской одежды из нетканых материалов одноразовый по ТУ 32.50.50-011-40393587-2021

Комплектность транспортной упаковки

1. Комплект одного варианта исполнения – 20 шт.;
2. Ярлык потребительский – 20 шт.;
3. Потребительская упаковка – 20 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;
5. Ярлык групповой – 1 шт.;
6. Групповая упаковка – 1 шт.;
7. Упаковочный лист – 1 шт.;
8. Этикетка транспортная – 1 шт.;
9. Транспортная упаковка – 1 шт.

● **Условный номер упаковщика и контролера:**

● **Дата упаковывания:**

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листа(ов).
Начальник Управления по
внедрению и регистрации ЛП ФГУП
«Московский эндокринный завод»
_____ Е.П. Самойлова

« 06 » 04 2022 года
М.П.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись С. Селезнев