

32.50.22.150

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Сурсил»



Хамоков З.Х

201 *ж* г.

Обувь ортопедическая малосложная

по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016

Руководство по эксплуатации (РЭ)

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016, варианты исполнения:

1. Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 145-150-155-160-165;
2. Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 170-175-180-185-190-195-200;
3. Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 205-210-215-220-225-230-235-240;
4. Мальчиковая и девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 225-230-235-240-245-250-255-260;
5. Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 210-215-220-225-230-235-240-245-255-260-265-270-275;
6. Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 245-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И РАЗРАБОТЧИКЕ

Разработка и производство медицинского изделия "Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016" осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Сурсил» (ООО «Сурсил»)

Телефон/Факс: +7 (495) 258-61-58.

Адрес места производства медицинского изделия:

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская д. 13

Подпись и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

ПП-вкладные обувные изделия

Лист

2

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

"Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016" (далее по тексту - обувь) предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности всех половозрастных групп при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см) приводящими к незначительным или умеренным функциональным нарушениям, в том числе и при начальной стадии диабетической патологии стоп.

Потенциальными потребителями обуви являются лица имеющие одно или несколько из клинических состояний, описанных в п.7 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Область применения – ортопедия.

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ

Номер вида обуви ортопедической малосложной 9-01, 9-02 по «Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р (с изменениями на 22 июля 2015 года)» Приказ Минтруда России от 24 мая 2013 г. №214н.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения обуви в медицинских целях – 1 по ГОСТ 31508.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией изделий – 250220.

№ докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № докл.	Подпись и дата

--	--	--	--	--

2. ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 ОПИСАНИЕ

Обувь ортопедическая малосложная, серийно выпускаемая продукция, изготавливается летняя, зимняя, весенне-осенняя, круглосезонная и может быть использована для реабилитации инвалидов в условиях лечебных и лечебно-профилактических учреждений, а также в бытовых условиях.

Обувь повседневная - женская и девичья изготавливается на низком и среднем каблуке; остальная - на низком.

Для больных сахарным диабетом не допускается изготавливать обувь с открытой носочной частью и состоящую из ремешков.

Обувь малодетская и дошкольная изготавливается с закрытой пяточной частью.

Обувь является нестерильным медицинским изделием, не подлежащим стерилизации.

Перед эксплуатацией следует внимательно ознакомиться с данным руководством.

Не рекомендуется эксплуатация после истечения срока службы.

2.2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обувь рассчитана для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре от плюс 40 °С до минус 20 °С.

Срок службы обуви не менее одного года, для детей инвалидов - не менее шести месяцев.

Срок сохраняемости обуви не более шести месяцев, для детей инвалидов - не более одного месяца.

Обувь ремонтпригодна в течение срока службы.

Критериями непригодности обуви к носке являются деформация или нарушение целостности специальных деталей, указанных в п.2.3 настоящего руководства. Специальные детали обуви ремонту не подлежат.

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Виды и размеры обуви малосложной приведены в таблице 1.

Таблица 1

Половозрастная группа применения обуви	Вид обуви	Размеры, мм	Обозначения (шифр) обуви / Модель
1	2	3	4
Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД)	Сапожки	145-150-155-160-165	09-С1МД-1, 09-С1МД-2, 09-С1МД-3, 09-С2МД-1, 09-С2МД-2, 09-С2МД-3, 09-С6МД-1, 09-С6МД-2, 09-С6МД-3,
	полусапожки		09-ПС1МД-1, 09-ПС1МД-2, 09-ПС1МД-3, 09-ПС2МД-1, 09-ПС2МД-2, 09-ПС2МД-3, 09-ПС6МД-1, 09-ПС6МД-2, 09-ПС6МД-3,
	ботинки		09-К1МД-1, 09-К1МД-2, 09-К1МД-3, 09-К3МД-1, 09-К3МД-2, 09-К3МД-3, 09-К6МД-1, 09-К6МД-2, 09-К6МД-3,
	полуботинки		010-К1МД-1, 010-К1МД-2, 010-К1МД-3, 010-К6МД-1, 010-К6МД-2, 010-К6МД-3,
	туфли		011-К1МД-1, 011-К1МД-2, 011-К1МД-3, 011-К2МД-1, 011-К2МД-2, 011-К2МД-3, 011-К6МД-1, 011-К6МД-2, 011-К6МД-3,
	сандалеты		013-К1МД-1, 013-К1МД-2, 013-К1МД-3, 013-К3МД-1, 013-К3МД-2, 013-К3МД-3, 013-К6МД-1, 013-К6МД-2, 013-К6МД-3
Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ)	Сапожки	170-175-180-185-190-195-200	09-С1ДШ-1, 09-С1ДШ-2, 09-С1ДШ-3, 09-С2ДШ-1, 09-С2ДШ-2, 09-С2ДШ-3, 09-С6ДШ-1, 09-С6ДШ-2, 09-С6ДШ-3
	полусапожки		09-ПС1ДШ-1, 09-ПС1ДШ-2, 09-ПС1ДШ-3, 09-ПС2ДШ-1, 09-ПС2ДШ-2, 09-ПС2ДШ-3, 09-ПС6ДШ-1, 09-ПС6ДШ-2, 09-ПС6ДШ-3
	ботинки		09-К1ДШ-1, 09-К1ДШ-2, 09-К1ДШ-3, 09-К3ДШ-1, 09-К3ДШ-2, 09-К3ДШ-3, 09-К6ДШ-1, 09-К6ДШ-2, 09-К6ДШ-3,
	полуботинки		010-К1ДШ-1, 010-К1ДШ-2, 010-К1ДШ-3, 010-К6ДШ-1, 010-К6ДШ-2, 010-К6ДШ-3
	туфли		011-К1ДШ-1, 011-К1ДШ-2, 011-К1ДШ-3, 011-К2ДШ-1, 011-К2ДШ-2, 011-К2ДШ-3, 011-К6ДШ-1, 011-К6ДШ-2, 011-К6ДШ-3
	сандалеты		013-К1ДШ-1, 013-К1ДШ-2, 013-К1ДШ-3, 013-К3ДШ-1, 013-К3ДШ-2, 013-К3ДШ-3, 013-К6ДШ-1, 013-К6ДШ-2, 013-К6ДШ-3,
Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш)	Сапожки	205-210-215-220-225-230-235-240	09-С1Ш-1, 09-С1Ш-2, 09-С1Ш-3, 09-С2Ш-1, 09-С2Ш-2, 09-С2Ш-3, 09-С6Ш-1, 09-С6Ш-2, 09-С6Ш-3
	полусапожки		09-ПС1Ш-1, 09-ПС1Ш-2, 09-ПС1Ш-3, 09-ПС2Ш-1, 09-ПС2Ш-2, 09-ПС2Ш-3, 09-ПС6Ш-1, 09-ПС6Ш-2, 09-ПС6Ш-3
	ботинки		09-К1Ш-1, 09-К1Ш-2, 09-К1Ш-3, 09-К3Ш-2, 09-К3Ш-3, 09-К6Ш-1, 09-К6Ш-2, 09-К6Ш-3,
	полуботинки		010-К1Ш-1, 010-К1Ш-2, 010-К1Ш-3, 010-К6Ш-1, 010-К6Ш-2, 010-К6Ш-3
	туфли		011-К1Ш-1, 011-К1Ш-2, 011-К1Ш-3, 011-К2Ш-1, 011-К2Ш-2, 011-К2Ш-3, 011-К6Ш-1, 011-К6Ш-2, 011-К6Ш-3
	сандалеты		013-К1Ш-1, 013-К1Ш-2, 013-К1Ш-3, 013-К3Ш-1, 013-К3Ш-2, 013-К3Ш-3, 013-К6Ш-1, 013-К6Ш-2, 013-К6Ш-3,
Мальчиковая и девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П)	Сапожки	225-230-235-240-245-250-255-260	09-С1П-1, 09-С1П-2, 09-С1П-3, 09-С2П-1, 09-С2П-2, 09-С2П-3, 09-С6П-1, 09-С6П-2, 09-С6П-3
	полусапожки		09-ПС1П-1, 09-ПС1П-2, 09-ПС1П-3, 09-ПС2П-1, 09-ПС2П-2, 09-ПС2П-3, 09-ПС6П-1, 09-ПС6П-2, 09-ПС6П-3
	ботинки		09-К1П-1, 09-К1П-2, 09-К1П-3, 09-К3П-2, 09-К3П-3, 09-К6П-1, 09-К6П-2, 09-К6П-3,
	полуботинки		010-К1П-1, 010-К1П-2, 010-К1П-3, 010-К6П-1, 010-К6П-2, 010-К6П-3
	туфли		011-К1П-1, 011-К1П-2, 011-К1П-3, 011-К2П-1, 011-К2П-2, 011-К2П-3, 011-К6П-1, 011-К6П-2, 011-К6П-3
	сандалеты		013-К1П-1, 013-К1П-2, 013-К1П-3, 013-К3П-1, 013-К3П-2, 013-К3П-3, 013-К6П-1, 013-К6П-2, 013-К6П-3,

ав. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подпись и дата.

ПП-вкладные обувные изделия

Лист

5

Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж)	Сапожки	210-215-220- 225-230-235- 240-245-255- 260-265-270- 275	09-С1Ж-1, 09-С1Ж-2, 09-С1Ж-3, 09-С2Ж-1, 09-С2Ж-2, 09-С2Ж-3, 09-С6Ж-1, 09-С6Ж-2, 09-С6Ж-3,
	полусапожки		09-ПС1Ж-1, 09-ПС1Ж-2, 09-ПС1Ж-3, 09-ПС2Ж-1, 09-ПС2Ж-2, 09-ПС2Ж-3, 09-ПС6Ж-1, 09-ПС6Ж-2, 09-ПС6Ж-3,
	ботинки		09-К1Ж-1, 09-К1Ж-2, 09-К1Ж-3, 09-К6Ж-1, 09-К6Ж-2, 09-К6Ж-3,
	полуботинки		010-К1Ж-1, 010-К1Ж-2, 010-К1Ж-3, 010-К6Ж-1, 010-К6Ж-2, 010-К6Ж-3,
	туфли		011-К1Ж-1, 011-К1Ж-2, 011-К1Ж-3, 011-К2Ж-1, 011-К2Ж-2, 011-К2Ж-3, 011-К6Ж-1, 011-К6Ж-2, 011-К6Ж-3,
	сандалеты		013-К1Ж-1, 013-К1Ж-2, 013-К1Ж-3, 013-К3Ж-1, 013-К3Ж-2, 013-К3Ж-3, 013-К6Ж-1, 013-К6Ж-2, 013-К6Ж-3,
Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М)	Сапожки	245-255-260- 265-270-275- 280-285-290- 295-300-305	09-С1М-1, 09-С1М-2, 09-С1М-3, 09-С2М-1, 09-С2М-2, 09-С2М-3, 09-С6М-1, 09-С6М-2, 09-С6М-3
	полусапожки		09-ПС1М-1, 09-ПС1М-2, 09-ПС1М-3, 09-ПС2М-1, 09-ПС2М-2, 09-ПС2М-3, 09-ПС6М-1, 09-ПС6М-2, 09-ПС6М-3
	ботинки		09-К1М-1, 09-К1М-2, 09-К1М-3, 09-К6М-1, 09-К6М-2, 09-К6М-3
	полуботинки		010-К1М-1, 010-К1М-2, 010-К1М-3, 010-К6М-1, 010-К6М-2, 010-К6М-3
	туфли		011-К1М-1, 011-К1М-2, 011-К1М-3, 011-К2М-1, 011-К2М-2, 011-К2М-3, 011-К6М-1, 011-К6М-2, 011-К6М-3
	сандалеты		013-К1М-1, 013-К1М-2, 013-К1М-3, 013-К3М-1, 013-К3М-2, 013-К3М-3, 013-К6М-1, 013-К6М-2, 013-К6М-3

Габаритные размеры обуви указаны на рисунках 1-6 и таблицах 2-7.

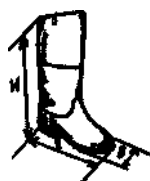


Рисунок 1 Сапожок

Таблица 2

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сапожок (С)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H не менее
Малодетская (МД)	09-С1МД-1, 09-С1МД-2, 09-С1МД-3, 09-С2МД-1, 09-С2МД-2, 09-С2МД-3, 09-С6МД-1, 09-С6МД-2, 09-С6МД-3,	145	157	67	126
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (ДШ)	09-С1ДШ-1, 09-С1ДШ-2, 09-С1ДШ-3, 09-С2ДШ-1, 09-С2ДШ-2, 09-С2ДШ-3, 09-С6ДШ-1, 09-С6ДШ-2, 09-С6ДШ-3	170	182	74	150
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
Для школьников-девочек и мальчиков (Ш)	09-С1Ш-1, 09-С1Ш-2, 09-С1Ш-3, 09-С2Ш-1, 09-С2Ш-2, 09-С2Ш-3, 09-С6Ш-1, 09-С6Ш-2, 09-С6Ш-3	200	212	83	Для девочек 180 Для мальчиков 184
		205	217	85	
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
Мальчишковая и девичья (П)	09-С1П-1, 09-С1П-2, 09-С1П-3, 09-С2П-1, 09-С2П-2, 09-С2П-3, 09-С6П-1, 09-С6П-2, 09-С6П-3	230	242	92	Для девочек 190 Для мальчиков 210
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	

№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Илв. № дубл.	Подпись и дата

Женская (Ж)	09-С1Ж-1, 09-С1Ж-2, 09-С1Ж-3, 09-С2Ж-1, 09-С2Ж-2, 09-С2Ж-3, 09-С6Ж-1, 09-С6Ж-2, 09-С6Ж-3,	260	272	100	345
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	97	
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
Мужская (М)	09-С1М-1, 09-С1М-2, 09-С1М-3, 09-С2М-1, 09-С2М-2, 09-С2М-3, 09-С6М-1, 09-С6М-2, 09-С6М-3	275	282	104	410
		245	257	97	
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

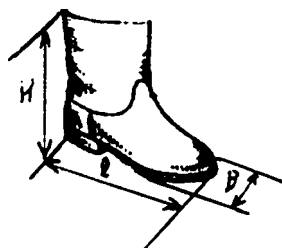


Рисунок .2 Полусапожок

Таблица 3

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полусапожок (ПС)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H не менее
Малодетская (М)-	09-ПС1МД-1, 09-ПС1МД-2, 09-ПС1МД-3, 09-ПС2МД-1, 09-ПС2МД-2, 09-ПС2МД-3, 09-ПС6МД-1, 09-ПС6МД-2, 09-ПС6МД-3,	145	157	67	-
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (ДШ)	09-ПС1ДШ-1, 09-ПС1ДШ-2, 09-ПС1ДШ-3, 09-ПС2ДШ-1, 09-ПС2ДШ-2, 09-ПС2ДШ-3, 09-ПС6ДШ-1, 09-ПС6ДШ-2, 09-ПС6ДШ-3	170	182	74	-
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
Для школьников-девочек и мальчиков (Ш)	09-ПС1Ш-1, 09-ПС1Ш-2, 09-ПС1Ш-3, 09-ПС2Ш-1, 09-ПС2Ш-2, 09-ПС2Ш-3, 09-ПС6Ш-1, 09-ПС6Ш-2, 09-ПС6Ш-3	195	207	82	Для девочек 145 Для мальчиков 150
		200	212	83	
		205	217	85	
		210	222	86	
		215	227	88	
Мальчишковая и девичья подростковые (П)	09-ПС1П-1, 09-ПС1П-2, 09-ПС1П-3, 09-ПС2П-1, 09-ПС2П-2, 09-ПС2П-3, 09-ПС6П-1, 09-ПС6П-2, 09-ПС6П-3	220	232	89	Для девочек 160 Для мальчиков 175
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	94	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	
		260	272	100	

на. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Женская (Ж)	09-ПС1Ж-1, 09-ПС1Ж-2, 09-ПС1Ж-3, 09-ПС2Ж-1, 09-ПС2Ж-2, 09-ПС2Ж-3, 09-ПС6Ж-1, 09-ПС6Ж-2, 09-ПС6Ж-3,	210	222	86	180
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		255	262	97	
		260	267	99	
		265	272	100	
		270	277	102	
		275	282	103	
Мужская (М)	09-ПС1М-1, 09-ПС1М-2, 09-ПС1М-3, 09-ПС2М-1, 09-ПС2М-2, 09-ПС2М-3, 09-ПС6М-1, 09-ПС6М-2, 09-ПС6М-3	245	257	97	180
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

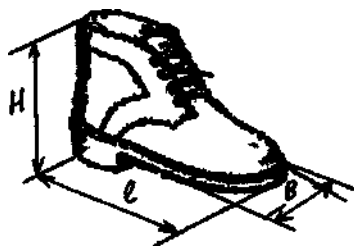


Рисунок 3 Ботинок

Таблица 4

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Ботинок (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0.5	H не менее
Малодетская- (МД)	09-К1МД-1, 09-К1МД-2, 09-К1МД-3, 09-К3МД-1, 09-К3МД-2, 09-К3МД-3, 09-К6МД-1, 09-К6МД-2, 09-К6МД-3,	145	157	67	106
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (Д)	09-К1Д-1, 09-К1Д-2, 09-К1Д-3, 09-К3Д-1, 09-К3Д-3, 09-К6Д-1, 09-К6Д-2, 09-К6Д-3,	170	182	74	118
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	09-К1Ш-1, 09-К1Ш-2, 09-К1Ш-3, 09-К3Ш-2, 09-К3Ш-3, 09-К6Ш-1, 09-К6Ш-2, 09-К6Ш-3,	200	212	83	Для девочек 139 Для мальчиков 150
		205	217	85	
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
Мальчиковая и девичья подростковые (П)	09-К1П-1, 09-К1П-2, 09-К1П-3, 09-К3П-1, 09-К3П-2, 09-К3П-3, 09-К6П-1, 09-К6П-2, 09-К6П-3,	235	247	94	Для девочек 143 Для мальчиков 124
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	
		260	272	100	
		265	277	102	
Женская (Ж)	09-К1Ж-1, 09-К1Ж-2, 09-К1Ж-3, 09-К6Ж-1, 09-К6Ж-2, 09-К6Ж-3,	210	222	86	156
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

		240	252	95	
		245	257	97	
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
Мужская (М)	09-К1М-1, 09-К1М-2, 09-К1М-3, 09-К6М-1, 09-К6М-2, 09-К6М-3	245	257	97	126
		255	262	98,5	
		260	267	100,0	
		265	272	101,5	
		270	277	103	
		275	282	104,5	
		280	287	106	
		285	292	107,5	
		290	297	109	
		295	302	110,5	
		300	307	112	
		305	312	113,5	

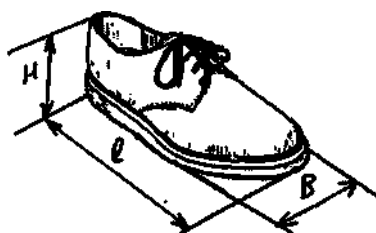


Рисунок 4 Полуботинок

Таблица 5

Половозрастная группа применения обуви	Обозначения (цифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Полуботинок (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H не менее
Малодетская- (МД)	010-К1МД-1, 010-К1МД-2, 010-К1МД-3, 010-К6МД-1, 010-К6МД-2, 010-К6МД-3,	145	157	67	45
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (ДШ)	010-К1ДШ-1, 010-К1ДШ-2, 010-К1ДШ-3, 010-К6ДШ-1, 010-К6ДШ-2, 010-К6ДШ-3	170	182	74	49
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
		200	212	83	
Для школьни- ков-девочек и мальчиков (Ш)	010-К1Ш-1, 010-К1Ш-2, 010-К1Ш-3, 010-К6Ш-1, 010-К6Ш-2, 010-К6Ш-3	205	217	85	Для девочек 59 Для мальчиков 60
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	94	
Мальчиковая и девичья подростковые (П)	010-К1П-1, 010-К1П-2, 010-К1П-3, 010-К6П-1, 010-К6П-2, 010-К6П-3	225	237	91	Для девочек 59 Для мальчиков 65
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	
		260	272	100	
Женская (Ж)	010-К1Ж-1, 010-К1Ж-2, 010-К1Ж-3, 010-К6Ж-1, 010-К6Ж-2, 010-К6Ж-3,	210	222,	86	61
		215	227,	88	
		220	232,	89	
		225	237,	91	
		230	242,	92	
		235	247,	94	
		240	252,	95	
		245	257,	96	
		255	262,	97	
		260	267,	99	

Подпись и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	№ подл.

		265	272;	100	
		270	277;	102	
		275	282	103	
Мужская (М)	010-К1М-1, 010-К1М-2, 010-К1М-3, 010-К6М-1, 010-К6М-2, 010-К6М-3	245	257	97	61
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

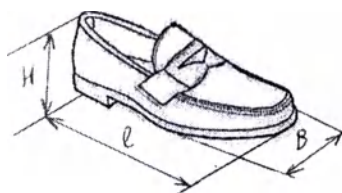


Рисунок 5 Туфли

Таблица 6

Половозраст- ная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви - Туфли (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H±1,5
Малодетская- (МД)	011-К1МД-1, 011-К1МД-2, 011-К1МД-3, 011-К2МД-1, 011-К2МД-2, 011-К2МД-3, 011-К6МД-1, 011-К6МД-2, 011-К6МД-3,	145	157	65	45
		150	162	66	
		155	167	68	
		160	172	69	
		165	177	71	
Дошкольная (ДШ)	011-К1ДШ-1, 011-К1ДШ-2, 011-К1ДШ-3, 011-К2ДШ-1, 011-К2ДШ-2, 011-К2ДШ-3, 011-К6ДШ-1, 011-К6ДШ-2, 011-К6ДШ-3	170	182	72	49
		175	187	74	
		180	192	75	
		185	197	77	
		190	202	78	
		195	207	80	
		200	212;	81	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	011-К1Ш-1, 011-К1Ш-2, 011-К1Ш-3, 011-К2Ш-1, 011-К2Ш-2, 011-К2Ш-3, 011-К6Ш-1, 011-К6Ш-2, 011-К6Ш-3	205	217	83	Для девочек 59 Для мальчиков 60
		210	222	84	
		215	227	86	
		220	232	87	
		225	237	89	
		230	242	90	
		235	247	92	
		240	252	93	
Мальчиковая и девочковая (П)	011-К1П-1, 011-К1П-2, 011-К1П-3, 011-К2П-1, 011-К2П-2, 011-К2П-3, 011-К6П-1, 011-К6П-2, 011-К6П-3	225	237	89	Для девочек 59 Для мальчиков 65
		230	242	90	
		235	247	92	
		240	252	93	
		245	257	95	
		250	262	96	
		255	267	98	
		260	272	99	
Женская (Ж)	011-К1Ж-1, 011-К1Ж-2, 011-К1Ж-3, 011-К2Ж-1, 011-К2Ж-2, 011-К2Ж-3, 011-К6Ж-1, 011-К6Ж-2, 011-К6Ж-3,	210	222	84	61
		215	227	86	
		220	232	87	
		225	237	89	
		230	242	90	
		235	247	92	
		240	252	93	
		245	257	95	
		255	262	96	
		260	267	98	
		265	272	99	
		270	277	101	
		275	282	102	

№ подл.	Подпись и дата	Имя, № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №			

--	--	--	--	--

Мужская (М)	011-К1М-1, 011-К1М-2, 011-К1М-3, 011-К2М-1, 011-К2М-2, 011-К2М-3, 011-К6М-1, 011-К6М-2, 011-К6М-3	245	257	97	61
		255	262	98	
		260	267	100	
		265	272	101	
		270	277	103	
		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

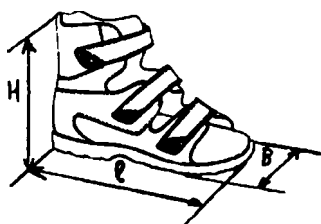


Рисунок А.6 Сандалеты

Таблица 7

Половозраст- ная группа применения обуви	Обозначения (шифры) обуви	Размеры, мм (по ГОСТ 11373)	Вид обуви – Сандалет (К)		
			Размеры, мм		
			L±1,5	B±0,5	H не менее
Малодетская- (МД)	013-К1МД-1, 013-К1МД-2, 013-К1МД-3, 013-К3МД-1, 013-К3МД-2, 013-К3МД-3, 013-К6МД-1, 013-К6МД-2, 013-К6МД-3	145	157	67	106
		150	162	68	
		155	167	70	
		160	172	71	
		165	177	73	
Дошкольная (Д)	013-К1Д-1, 013-К1Д-2, 013-К1Д-3, 013-К3Д-1, 013-К3Д-2, 013-К3Д-3, 013-К6Д-1, 013-К6Д-2, 013-К6Д-3,	170	182	74	118
		175	187	76	
		180	192	77	
		185	197	79	
		190	202	80	
		195	207	82	
Для школьников- девочек и мальчиков (Ш)	013-К1Ш-1, 013-К1Ш-2, 013-К1Ш-3, 013-К3Ш-1, 013-К3Ш-2, 013-К3Ш-3, 013-К6Ш-1, 013-К6Ш-2, 013-К6Ш-3,	200	212	83	Для девочек 139 Для мальчиков 150
		205	217	85	
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
Мальчиковая и девочковая подростковые (П)	013-К1П-1, 013-К1П-2, 013-К1П-3, 013-К3П-1, 013-К3П-2, 013-К3П-3, 013-К6П-1, 013-К6П-2, 013-К6П-3,	240	252	94	Для девочек 143 Для мальчиков 124
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		250	262	97	
		255	267	99	
Женская (Ж)	013-К1Ж-1, 013-К1Ж-2, 013-К1Ж-3, 013-К3Ж-1, 013-К3Ж-2, 013-К3Ж-3, 013-К6Ж-1, 013-К6Ж-2, 013-К6Ж-3,	260	272	100	156
		210	222	86	
		215	227	88	
		220	232	89	
		225	237	91	
		230	242	92	
		235	247	94	
		240	252	95	
		245	257	96	
		255	262	97	
		260	267	99	
Мужская (М)	013-К1М-1, 013-К1М-2, 013-К1М-3, 013-К3М-1, 013-К3М-2, 013-К3М-3, 013-К6М-1, 013-К6М-2, 013-К6М-3	265	272	101	126
		270	277	103	
		245	257	97	
		255	262	98	
		260	267	100	

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата

		275	282	104	
		280	287	106	
		285	292	107	
		290	297	109	
		295	302	110	
		300	307	112	
		305	312	113	

Согласно приложения 13 ТР ТС 007/2011 масса полупары обуви не должна превышать:

- малодетская размером 145-165 мм повседневная обувь - 300 г.;
- малодетская летняя обувь - 150 г.;
- малодетская домашняя обувь - 60 г.;
- дошкольная размером 170-200 мм. повседневная обувь - 380 г.;
- дошкольная летняя обувь - 200 г.;
- дошкольная домашняя обувь - 70 г.

С размера 205 мм и выше масса обуви не регламентируется.

В соответствии с пунктом 6.2.9 ГОСТ Р 54407 масса полупары обуви на подбор в исходном размере должна соответствовать массе образца-эталона, увеличенной на коэффициент 1,10.

Масса полупары обуви для взрослых, не должна превышать:

Мужская обувь - сапожок 1050 г.; полусапожок 870 г.; ботинки 850 г.; полуботинки 400 г.; сандалеты 380 г.

Женская обувь - сапожек 800 г.; полусапожок 650 г.; ботинки 635 г.; туфли с открытыми пяточной или носочной частями 320 г.; туфли 350 г.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением может включать специальные детали:

- специальные жесткие детали - союзка, полусоюзка - жесткие, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный или укороченный, бочок жесткий;

- специальные мягкие детали - дополнительная шнуровка, смягчающие прокладки;

- межстелечные слои - выкладка сводов (наружного и внутреннего), косок, супинатор, пронатор.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов;

я. № подл.	Подпись и дата
	Имя, № дубл.
	Взам. инв. №
	Подпись и дата

- специальные детали низа - подошва особой формы (формованная, плоская профилированная), каблук;

В зависимости от сезонности обувь может быть изготовлена с утепленной подкладкой и без неё.

3 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закреплена на ноге, искусственной стопе протеза, на ноге с аппаратом при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт».

3.2 В первый день после получения обуви необходимо надеть её и походить в ней в течении 15-20 минут, во второй и третий день рекомендуется надеть обувь и в течении одного часа (можно с перерывами) походить в ней.

3.3 При эксплуатации обуви необходимо учитывать сезонность (летняя, зимняя, весенне-осенняя). Кожаная обувь не предназначена для носки в сырую, дождливую погоду, т.к. она не является непромокаемой.

3.4 При носке обуви:

- обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы, вызывать болезненных ощущений и неудобств при пользовании;

- обувь должна быть плотно закреплена на ноге при помощи шнурков, пряжек, текстильных застежек «контакт»;

- при носке обуви в течение дня следует изменять объем обуви и плотность ее прилегания к ноге при помощи застежек;

- не должно быть избыточного давления верха обуви и со стороны межстелечного слоя или стелек на мягкие ткани стопы;

- должен быть обеспечен незатрудненный перекал при ходьбе, а также надежная фиксация стопы в обуви в заданном положении;

- подошва обуви должна иметь хорошее сцепление с опорной поверхностью.

3.5 Ежедневно на ночь необходимо обмывать ноги теплой водой и насухо вытирать их полотенцем.

№ п/п	Подпись и дата	Имя, № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

4.4 Для освежения цвета, придания блеска и защиты от вредного воздействия окружающей среды, после чистки на кожу обуви следует нанести тонкий слой цветного или бесцветного крема и располировать его волосяной щеткой или шерстяной тряпкой. В случае, если лицевой слой кожи механически поврежден, на это место наносится тонкий слой краски соответствующего цвета.

Таблица 2

Содержание маркировки	Место нанесения маркировки	Способ нанесения маркировки
Товарный знак или наименование предприятия изготовителя	В геленочной части вкладной стельки (полустельки), или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берца, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Штемпелевание, горячее тиснение через фольгу

Номер контролера, ОТК (Клеймо ОТК)	На штаферке, или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под креплением (застежка «контакт» или «молния»).	Штемпелевание
Модель; размер штихмассовый; полнота; дата выпуска (месяц, год).	На ярлык, прикрепляемый к подкладке каждой полупары обуви или другим деталям	Штемпелевание

5.1.2 Маркировка коробки из картона (потребительской упаковки).

На торцевой поверхности каждой коробки прикреплена этикетка или нанесен штамп с четким маркированием следующих обозначений:

- товарного знака (при его наличии);
- наименования предприятия-изготовителя и его почтового адреса;
- наименования обуви;
- обозначения настоящих технических условий;
- артикул;
- размер штихмассовый;
- полнота;
- цвет;
- дата выпуска (месяц, год);
- количества пар обуви (на коробках, в которые упаковано несколько

пар).

5.1.3 Маркировка транспортной тары содержит:

- товарный знак (при его наличии);
- наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
- артикул (индекс);
- обозначение настоящих ТУ;
- номера ящика;
- материал ящика;
- масса (брутто);
- дата упаковки;
- номер упаковщика.

5.2 УПАКОВКА

№ п/п	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

5.2.1 Каждая пара обуви упакована в коробку из картона для обуви (потребительская упаковка).

5.2.2 В каждую картонную коробку вложено руководство по эксплуатации.

5.2.3 Картонные коробки с обувью плотно уложены в транспортную тару - ящики деревянные или ящики из гофрированного картона.

Количество потребительских упаковок в транспортной таре и схему укладки определяет изготовитель обуви в зависимости от количества пар (полупар) обуви в одной поставке.

6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14 и не выше плюс 25 градусов °С и относительной влажности воздуха 50 - 80 %.

6.2 Хранение обуви в упакованном виде должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 м.

6.3 Расстояние хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м.

6.4 Обувь при хранении должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

6.5 Транспортирование обуви должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре воздуха от минус 50 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

6.6 При транспортировании в условиях отрицательных температур требуется выдержка в течение 12 часов при комнатной температуре.

7. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обувь показана для применения детям, подросткам и взрослым пациентам с умеренно выраженной статодинамической функцией:

ав. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Изм. № дубл.
Подпись и дата	

плоскостопие, пяточные «шпоры», разные размеры стоп, укорочение нижней конечности с компенсацией до 3 см, а также больным с начальной стадией сахарного диабета для:

- обеспечения рационального распределения давления по подошвенной поверхности стопы с учётом её индивидуальных анатомо-функциональных особенностей;
- восстановления или компенсации функции стояния и ходьбы;
- предотвращения травм мягких тканей стопы с целью профилактики гнойно-некротических осложнений и ранней ампутации стопы;
- профилактики или компенсации деформации костно-суставного аппарата стопы.

8 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение обуви не по медицинскому назначению.

8.2 ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не выявлены.

9 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБУВИ

Ограничений по совместному применению обуви с другими медицинскими изделиями разрешенными к применению в установленном порядке на территории РФ не выявлено.

10 РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБУВИ. МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

- риск возникновения аллергической реакции на материалы изготовления обуви. При возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

- риск дискомфорта, боли, раздражения, травмы пациента при неправильной эксплуатации обуви. Во избежание риска дискомфорта, боли,

на №подл.	Подпись и дата	Взам. лив. №	Изм. №дубл.	Подпись и дата

раздражения, травмы следует соблюдать правила эксплуатации обуви изложенные в настоящем руководстве. Следует прекратить эксплуатацию обуви при возникновении дискомфорта, боли или раздражения.

- риск неправильного подбора по виду, назначению, размеру и полноте. Во избежание риска неправильного подбора обуви рекомендовано подбирать обувь врачом-ортопедом.

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ

11.1 В комплект поставки соответствует Таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	Примечание
- Обувь ортопедическая малосложная по ТУ 32.50.22-001-02222221-2016*	1	одна пара / полупара
- руководство по эксплуатации;	1	
- упаковка.	1	

* - соответствующий вариант исполнения:

1. Малодетская с деформациями и дефектами стоп (МД) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 145-150-155-160-165;
2. Дошкольная с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (ДШ) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 170-175-180-185-190-195-200;
3. Для школьников-мальчиков и девочек с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ш) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 205-210-215-220-225-230-235-240;
4. Мальчиковая и девичья с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (П) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 225-230-235-240-245-250-255-260;
5. Женская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (Ж) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 210-215-220-225-230-235-240-245-255-260-265-270-275;
6. Мужская с деформациями, дефектами стоп и для больных сахарным диабетом (М) (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты) размеры 245-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305.

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует срок носки обуви при соблюдении пользователем условий эксплуатации и хранения.

12.2 Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- на кожаной подошве – 40 дней;

№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;
- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;
- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;
- на детскую обувь – 45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

12.3 Гарантийными случаями являются:

- разрушение шва крепления деталей верха обуви.
- выпадение кнопок, застежек, блочек и др. фурнитуры.
- разрыв кожи верха заготовки по строчке.
- деформация жестких деталей верха обуви.
- отрыв и отставание подошвы.
- износ подошвы.
- излом каблука.
- разрыв кожи верха по грани следа.

12.4 В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине пользователя.

13 УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 Обувь, которая утратила свои эксплуатационные качества после окончания срока службы, подлежит утилизации как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Допускается утилизация обуви в качестве бытовых отходов.

14 РЕКЛАМАЦИИ

По всем вопросам, связанным с качеством обуви обращаться к производителю.

Общество с ограниченной ответственностью «Сурсил» (ООО «Сурсил»)

Телефон/Факс: +7 (495) 258-61-58.

ав. № подл.	Подпись и дата	Инт. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №			

Адрес места производства медицинского изделия:

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская д. 13.

E-mail: sursil@inbox.ru Internet: <http://www.sursil.ru>

15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СТАНДАРТОВ

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 161-86 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 288-72 Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 939-88 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1562-69 Сыромять. Технические условия

ГОСТ 1838-91 Кожа из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903-78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 1904-81 Кожа шорно-седельная. Технические условия

ГОСТ 3717-84 Замша. Технические условия

ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия

ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Изм. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические.

Технические условия

ГОСТ 9182-75 Кожа для рантов Технические условия

ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

ГОСТ 10350-81 Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия

ГОСТ ISO 10993-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

ОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкоммеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры.

ГОСТ 12632-79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия.

ГОСТ 13514-93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14226-80 Обувь. Нормы гибкости

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия

ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16534-89 Коробки из картона для обуви. Технические условия

ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условия

ГОСТ 21463-87 Обувь. Нормы прочности

ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения

Подпись и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изм. № дубл.

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные.
Общие технические требования.

ГОСТ 28546-2002 Мыло туалетное твердое. Общие технические условия.

ГОСТ 29298-2005 Ткани обувные хлопчатобумажные и смешанные
бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 29277-92 Кожа для низа обуви. Технические условия.

ГОСТ 30019.1-93 Застежка текстильная. Общие технические условия.

ГОСТ 30226-93 Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические.
Технические условия.

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости
от потенциального риска применения. Общие требования

ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с
ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и
методы испытаний

ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности.
Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. часть 1.
Метрологические и технические требования.

ГОСТ 54407-2011 Обувь ортопедическая. Общие технические условия.

ОСТ 17-192-88 Блочки, крючки, заклепки.

ОСТ 17-303-83 Нитки капроновые обувные. Технические условия.

ОСТ 17-891-86 Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические
условия.

ТУ 6-00-6917903-14 Краска штемпельная.

ТУ 29-02-596 Фольга для маркировки.

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами.

МУ 25.1-001-86 Устойчивость изделий медицинской техники к
воздействию агрессивных биологических жидкостей

ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного Союза. О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.

№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Иинв. № дубл.	Подпись и дата

Масса полупары образца эталона для каждого варианта исполнения по
каждому размеру

Таблица Г.1

[illegible]

Лист

№ п/п	№ документа	Подпись и дата	Взам. инв. №	Исх. № дубл.	Подпись и дата

Лист

Имя, № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подпись и дата

Ф.И.О. и должность	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инв. № попул.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Лист

№ п/п	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	Подпись и дата	№ п/п
1					271
2					271
3					169
4					76
5					226
6					171
7					167
8					166
9					168
10					276
11					275
12					171
13					371
14					415
15					438
16					449
17					415
18					436
19					424
20					410
21					465
22					379
23					421
24					443
25					454
26					421
27					442
28					431
29					417
30					471
31					385
32					429
33					449
34					461
35					429
36					449
37					439
38					421
39					479
40					391
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Имя, № докум.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя, № докум.	Подпись и дата
---------------	----------------	--------------	---------------	----------------

[illegible]

№ п/п	№ документа	Дата	Подпись и дата	Инициалы	Подпись и дата
1	2	3	4	5	6

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

Лист

[illegible]

ИВ. № подл.

Хвост 3.х.

89
Всего получено
пропущено печатью
и лист (ов)

