



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Средство гемостатическое «Гемофлекс» Про и
«Гемофлекс» Комбат, стерильное
по ТУ 9393-003-67539369-2013»**

Медицинское изделие "Средство гемостатическое Гемофлекс Про, стерильное
по ТУ 9393-003-67539369-2013", размер 5 см x 7,5 см

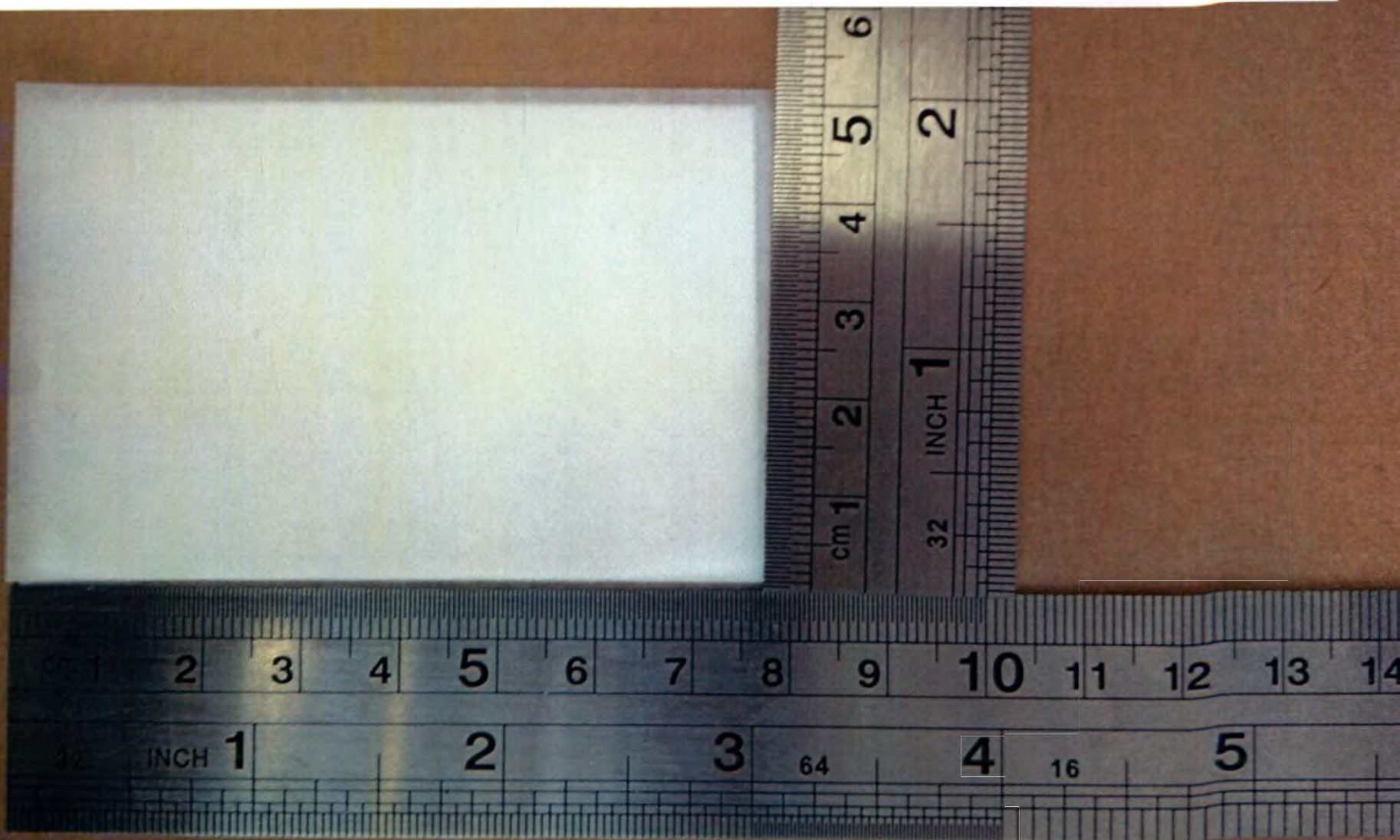

Медицинское изделие "Средство гемостатическое Гемофлекс Комбат, стерильное по ТУ 9393-003-67539369-2013"
размер 7,5 см x 7,5 см

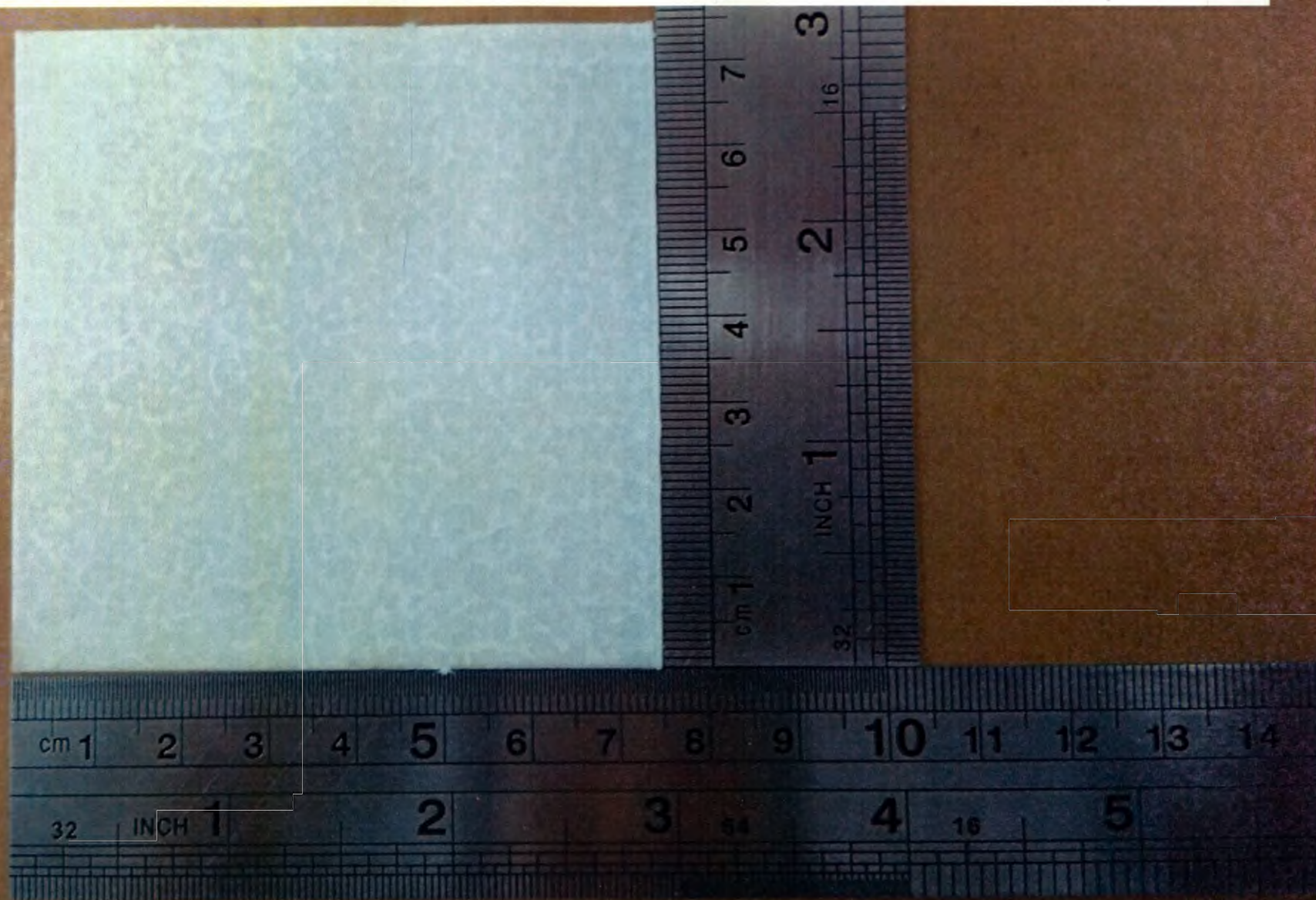

Медицинское изделие

«Средство гемостатическое Гемофлекс, стерильное, размер 7,5 см х 160 см, ТУ 9393-003-67539369-2013»
в транспортной упаковке



гемофлекс

СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ
ДЛЯ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО И
КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЙ
7,5 см х 160 см
ТУ 9393-003-67539369-2013


Номер партии: 751600250520. Дата стерилизации: 01.2020. Количество: 80 шт.
Хранить в сухом месте при температуре не выше 40°С.
Срок хранения 5 лет с даты стерилизации.

ООО «Инмед», 198515
г. Санкт-Петербург, л. Стрельна
ул. Свечи, дом 3А, литера А.

Медицинское изделие

«Средство гемостатическое Гемофлекс Комбат, стерильное, размер 7,5 см x 160 см, ТУ 9393-003-67539369-2013»

упакованное в барьерную систему для стерилизации

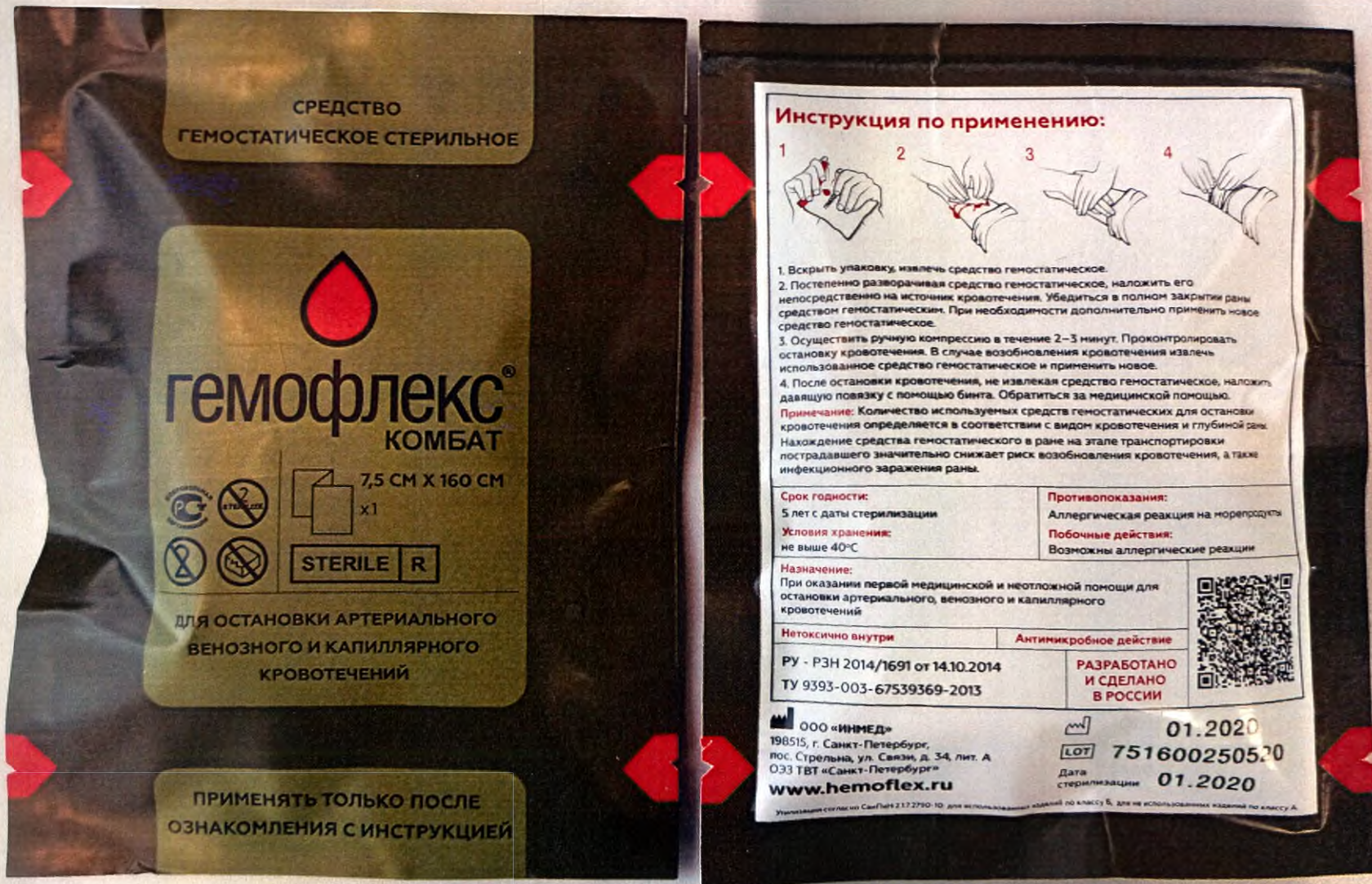

Медицинское изделие

«Средство гемостатическое Гемофлекс Про, стерильное, размер 5,0 см x 7,5 см, ТУ 9393-003-67539369-2013»
упакованное в барьерную систему для стерилизации

СРЕДСТВО
ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ


гемофлекс[®]
про



5,0 CM X 7,5 CM

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО,
ВЕНОЗНОГО, ПАРЕНХИМАТОЗНОГО
И КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЙ

ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Инструкция по применению:



1. Вскрыть упаковку, извлечь средство гемостатическое.
2. Удалить подложку, защищающую контактную сторону средства гемостатического.
3. Контактной стороной наложить средство гемостатическое на область кровотечения, обеспечив перекрытие краев раны на 1–2 см. Убедиться, что обеспечен контакт со всей поверхностью кровотечения.
4. Осуществить пальцевую компрессию в течение 2–3 минут.
5. Проконтролировать достижение гемостаза, удалить средство гемостатическое.
6. В случае возобновления кровотечения, дополнительно применить новое средство гемостатическое.

Срок годности:
5 лет с даты стерилизации
Условия хранения:
не выше 40°C

Противопоказания:
Аллергическая реакция на норепродукты
Побочные действия:
Возможны аллергические реакции

Назначение:
При проведении хирургических вмешательств для остановки артериального, венозного, паренхиматозного и капиллярного кровотечений

Нетоксично внутри

Антимикробное действие

РУ - РЗН 2014/1691 от 14.10.2014
ТУ 9393-003-67539369-2013

РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ



ООО «ИНМЕД»
198515, г. Санкт-Петербург,
пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А
ОЗЗ ТВТ «Санкт-Петербург»
www.hemoflex.ru

01.2020
LOT 5750230120
Дата стерилизации 01.2020

Упаковка согласно СанПиН 2.1.7.290-10 для использования изделий по классу В, для не использованных изделий по классу А.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) лист 06

Генеральный директор ООО «Инмед»

Н.Ю. Максимов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Инмед»

 Максимов Н.Ю.

«15» июля 2020 г.



Макеты маркировок

барьерной системы для стерилизации и транспортной упаковки

медицинского изделия

**«Средство гемостатическое Гемофлекс Про и Гемофлекс Комбат, стерильное
по ТУ 9393-003-67539369-2013»**

2020 г.

*Макет маркировки барьерной системы для стерилизации
Средства гемостатического «Гемофлекс» Комбат, стерильного, 7,5 см × 160 см
(лицевая сторона)*



**Макет маркировки барьерной системы для стерилизации
Средства гемостатического «Гемофлекс» Комбат, стерильного, 7,5см × 160 см
(оборотная сторона)**

Инструкция по применению:



1. Вскрыть упаковку, извлечь средство гемостатическое.
 2. Постепенно разворачивая средство гемостатическое, наложить его непосредственно на источник кровотечения. Убедиться в полном закрытии раны средством гемостатическим. При необходимости дополнительно применить новое средство гемостатическое.
 3. Осуществить ручную компрессию в течение 2–3 минут. Проконтролировать остановку кровотечения. В случае возобновления кровотечения извлечь использованное средство гемостатическое и применить новое.
 4. После остановки кровотечения, не извлекая средство гемостатическое, наложить давящую повязку с помощью бинта. Обратиться за медицинской помощью.
- Примечание:** Количество используемых средств гемостатических для остановки кровотечения определяется в соответствии с видом кровотечения и глубиной раны. Нахождение средства гемостатического в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также инфекционного заражения раны.

Срок годности:

5 лет с даты стерилизации

Условия хранения:

не выше 40°C

Противопоказания:

Аллергическая реакция на морепродукты

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции

Назначение:

При оказании первой медицинской и неотложной помощи для остановки артериального, венозного и капиллярного кровотечений

Нетоксично внутри

Антимикробное действие

РУ - РЗН 2014/1691 от 14.10.2014

ТУ 9393-003-67539369-2013

**РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**



ООО «ИНМЕД»

198515, г. Санкт-Петербург,
пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»

www.hemoflex.ru



LOT

Дата
стерилизации

Утилизация согласно СанПиН 2.17.2790-10: для использованных изделий по классу Б, для неиспользованных изделий по классу А.

*Макет маркировки барьерной системы для стерилизации
Средства гемостатического «Гемофлекс» Про, стерильного, 5,0 см × 7,5 см
(лицевая сторона)*

СРЕДСТВО
ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ



гемофлекс®
про



5,0 CM X 7,5 CM



STERILE

R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО,
ВЕНОЗНОГО, ПАРЕНХИМАТОЗНОГО
И КАПИЛЛЯРНОГО КРОВОТЕЧЕНИЙ

ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

**Макет маркировки барьерной системы для стерилизации
Средства гемостатического «Гемофлекс» Про, стерильного, 5,0 см × 7,5 см
(оборотная сторона)**

Инструкция по применению:



1. Вскрыть упаковку, извлечь средство гемостатическое.
2. Удалить подложку, защищающую контактную сторону средства гемостатического.
3. Контактной стороной наложить средство гемостатическое на область кровотечения, обеспечив перекрытие краев раны на 1–2 см. Убедиться, что обеспечен контакт со всей поверхностью кровотечения.
4. Осуществить пальцевую компрессию в течение 2–3 минут.
5. Проконтролировать достижение гемостаза, удалить средство гемостатическое.
6. В случае возобновления кровотечения, дополнительно применить новое средство гемостатическое.

Срок годности:
5 лет с даты стерилизации

Условия хранения:
не выше 40°C

Противопоказания:
Аллергическая реакция на морепродукты

Побочные действия:
Возможны аллергические реакции

Назначение:
При проведении хирургических вмешательств для остановки артериального, венозного, паренхиматозного и капиллярного кровотечений

Нетоксично внутри

Антимикробное действие

РУ - РЗН 2014/1691 от 14.10.2014
ТУ 9393-003-67539369-2013

**РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**



ООО «ИНМЕД»
198515, г. Санкт-Петербург,
пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»
www.hemoflex.ru



LOT

Дата
стерилизации

Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.2790-10: для использованных изделий по классу Б, для не использованных изделий по классу А.

Макет транспортной упаковки
Средства гемостатического «Гемофлекс» стерильного, 7,5 см × 160 см



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) лист об

Генеральный директор ООО «Инмед»

Н.Ю. Максимов

