

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Мединновация»

Рахматуллина Ю.А.
«08» февраля 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 32.50.50-002-05511159-2019

Издание №3

Дата введения: 22 августа 2019

2019

1 ОПИСАНИЕ

1.1 Область применения

Настоящая инструкция определяет предназначение медицинского изделия «Набор хирургический одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-002-05511159-2019», устанавливает порядок ее использования и утилизации.

1.1 Изготовитель медицинского изделия

ООО «Мединновация», адрес: 422545, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, улица Баки Урманче, дом 12, кв. 54, e-mail: medinnovac@bk.ru

1.2 Назначение медицинского изделия

Набор хирургический одноразовый стерильный (в дальнейшем набор), предназначенный для использования во время хирургических процедур в различных областях клинической практики, в том числе и в процедурах пластической хирургии. Набор предназначен для одноразового использования.

Принцип действия набора заключается в использовании медицинским персоналом специально подобранных изделий, входящих в состав набора для реализации различных хирургических процедур.

Потенциальные потребители – медицинский персонал.

Набор предназначен для применения в медицинских учреждениях, клиниках, клинических диспансерах и больницах, научных и других организациях здравоохранения.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2а по ГОСТ 31508.

1.3 Состав набора

1. Повязка (Варианты исполнения по размерам: PM 001; PM 002; PM 003; PM 004; PM 005; PM 006; PM 007; PM 008; PM 009; PM 010; PM 011; PM 012; PM 013; PM 014; PM 015; PM 016; PM 017; PM 018; PM 019; PM 020; PM 021; PM 022; PM 023; PM 024; PM 025; PM 026; PM 027; PM 028; PM 029; PM 030; PM 031; PM 032; PM 033; PM 034; PM 035; PM 036; PM 037; PM 038; PM 039; PM 040; PM 041; PM 042; PM 043; PM 044; PM 045; PM 046; PM 047; PM 048; PM 049; PM 050; PM 051; PM 052; PM 053; PM 054; PM 055; PM 056; PM 057; PM 058; PM 059; PM 060; PM 061; PM 062; PM 063; PM 064; PM 065; PM 066; PM 067; PM 068; PM 069; PM 070; PM 071; PM 072; PM 073; PM 074; PM 075; PM 076; PM 077; PM 078; PM 079; PM 080; PM 081; PM 082; PM 083; PM 084; PM 085; PM 086; PM 087; PM 088; PM 089; PM 090; PM 091; PM 092; PM 093; PM 094; PM 095; PM 096; PM 097; PM 098; PM 099; PM 100) - не более 10 шт.

2. Пластырь медицинский стерильный бактерицидный с антисептиком разных форм и размеров производства фирмы "Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.", Китай, РУ № РЗН 2015/3108 (Варианты исполнения: - на тканевой основе, размеры в мм: 4х38, 4х76, 9х38, 5х100, 10х45, 13х102, 16х57, 19х38, 19х55, 19х63, 19х64, 19х66, 19х72, 19х76, 20х45, 20х75, 20х120, 25х25, D22, 25х72, 25х76, 25х82, 26х102, 29х56, 30х55, 30х64, 32х72, 38х38, 38х72, 45х63, 50х60, 50х62, 50х72, 50х100, 52х84, 58х82, 64х76, 64х102, 64х110. - на нетканой основе, размеры в мм: 4х38, 4х76, 9х38, 5х100, 10х45, 13х102, 16х57, 19х38, 19х55, 19х63, 19х64, 19х66, 19х72, 19х76, 20х45, 20х75, 20х120, 25х25, D22, 25х72, 25х76, 25х82, 26х102, 29х56, 30х55, 30х64, 32х72, 38х38, 38х72, 45х63, 50х60, 50х62, 50х72, 50х100, 52х84, 58х82, 64х76, 64х102, 64х110. - на полимерной основе, размеры в мм: 4х38, 4х76, 9х38, 5х100, 10х45, 13х102, 16х57, 19х38, 19х55, 19х63, 19х64, 19х66, 19х72, 19х76, 20х45, 20х75, 20х120, 25х25, D22, 25х72, 25х76, 25х82, 26х102, 29х56, 30х55, 30х64, 32х72, 38х38, 38х72, 45х63, 50х60, 50х62, 50х72, 50х100, 52х84, 58х82, 64х76, 64х102, 64х110) - не более 10 шт.

3. Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ № ФСР 2010/07936 (Варианты исполнения: 1) Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; 2) Пинцет полимерный одноразовый стерильный

200 мм; 3) Пинцет полимерный одноразовый стерильный 250 мм; 4) Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм; 5) Пинцет окончатый полимерный одноразовый стерильный 125 мм; 6) Пинцет остроконечный полимерный одноразовый стерильный 125 мм; 7) Пинцет изогнутый полимерный одноразовый стерильный 125 мм; 8) Пинцет штыкообразный полимерный одноразовый стерильный 150 мм) - не более 5 шт.

4. Скальпели хирургические одноразовые по ТУ 9433-121-05519988-2002, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, РУ № ФСР 2012/13462 (Варианты исполнения: 1) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием № 10; 2) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием № 11; 3) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием № 12; 4) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием № 13; 5) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием № 15; 6) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 1 с лезвием № 16; 7) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием № 18; 8) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием № 20; 9) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием № 21; 10) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием № 22; 11) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием № 23; 12) скальпель хирургический одноразовый с пластмассовой ручкой Тип 2 с лезвием № 24) - не более 5 шт.

5. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010, производства ООО "МПК "Елец", Россия, РУ № РЗН 2015/2974 (Варианты исполнения: 1) трехдетальный с иглой инъекционной вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»; 2) трехдетальный с иглой инъекционной вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»; 3) трехдетальный стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки; 4) трехдетальный с иглой инъекционной инсулиновый вместимостью 1 ml «Луер» с градуировкой шкалы 40 ин/ед; 5) трехдетальный с иглой инъекционной инсулиновые вместимостью 1; 0,3; 0,5 ml «Луер» с градуировкой шкалы 100 ин/ед; 100/30 ин/ед; 100/50 ин/ед; 6) трехдетальный с иглой инъекционной туберкулиновый вместимостью 1 ml «Луер»; 7) двухдетальный с иглой инъекционной вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер») - не более 10 шт.

6. Иглы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-74017482-2018, производства ООО "МПК "Елец", Россия, РУ № РЗН 2019/8515 (Варианты исполнения: 1. «Луер» (0,30x12,0) мм. 2. «Луер» (0,33x12,0) мм. 3. «Луер» (0,33x12,7) мм. 4. «Луер» (0,40x12,0) мм. 5. «Луер» (0,45x12,0) мм. 6. «Луер» (0,45x12,7) мм. 7. «Луер» (0,45x16,0) мм. 8. «Луер» (0,50x13,0) мм. 9. «Луер» (0,50x15,0) мм. 10. «Луер» (0,50x16,0) мм. 11. «Луер» (0,50x18,0) мм. 12. «Луер» (0,50x25,0) мм. 13. «Луер» (0,60x25,0) мм. 14. «Луер» (0,60x30,0) мм. 15. «Луер» (0,60x32,0) мм. 16. «Луер» (0,60x42,0) мм. 17. «Луер» (0,60x45,0) мм. 18. «Луер» (0,63x32,0) мм. 19. «Луер» (0,70x30,0) мм. 20. «Луер» (0,70x32,0) мм. 21. «Луер» (0,70x38,0) мм. 22. «Луер» (0,70x40,0) мм. 23. «Луер» (0,70x42,0) мм. 24. «Луер» (0,70x45,0) мм. 25. «Луер» (0,70x50,0) мм. 26. «Луер» (0,80x38,0) мм. 27. «Луер» (0,80x40,0) мм. 28. «Луер» (0,80x42,0) мм. 29. «Луер» (0,80x45,0) мм. 30. «Луер» (0,80x50,0) мм. 31. «Луер» (0,90x40,0) мм. 32. «Луер» (0,90x42,0) мм. 33. «Луер» (0,90x45,0) мм. 34. «Луер» (0,90x50,0) мм. 35. «Луер» (1,10x40,0) мм. 36. «Луер» (1,10x50,0) мм. 37. «Луер» (1,20x40,0) мм. 38. «Луер» (1,20x50,0) мм. 39. «Луер» (1,40x40,0) мм. 40. «Луер» (1,40x50,0) мм. 41. «Луер» (1,50x40,0) мм. 42. «Луер» (1,50x50,0) мм. 43. «Луер» (1,60x40,0) мм. 44. «Луер» (1,60x50,0) мм) - не более 20 шт.

7. Бинты фиксирующие с неосыпающимися краями по ТУ 9393-003-14959781-2013 производства ООО «Эвтекс», Россия РУ № РЗН 2015/2963 (Варианты исполнения: 1) "ФРИЛАСТ",

размером 4,0 см х 1,7 м; 6,0 см х 1,7 м; 8,0 см х 1,7 м; 10,0 см х 1,7 м; 12,0 см х 1,7 м. 2) "БИЛАСТ", размером 4,0 см х 1,7 м; 6,0 см х 1,7 м; 8,0 см х 1,7 м; 10,0 см х 1,7 м; 12,0 см х 1,7 м.) - не более 5 шт.

8. Лоток полимерный (Варианты исполнения: $(10 \pm 1,5) \times (10 \pm 1,5)$ см.; $(10 \pm 1,5) \times (12 \pm 1,5)$ см.; $(10 \pm 1,5) \times (14 \pm 1,5)$ см.; $(10 \pm 1,5) \times (16 \pm 1,5)$ см.; $(12 \pm 1,5) \times (12 \pm 1,5)$ см.; $(12 \pm 1,5) \times (14 \pm 1,5)$ см.; $(12 \pm 1,5) \times (16 \pm 1,5)$ см.; $(14 \pm 1,5) \times (14 \pm 1,5)$ см.; $(14 \pm 1,5) \times (16 \pm 1,5)$ см.; $(14 \pm 1,5) \times (18 \pm 1,5)$ см.; $(14 \pm 1,5) \times (20 \pm 1,5)$ см.; $(16 \pm 1,5) \times (20 \pm 1,5)$ см.; $(16 \pm 1,5) \times (22 \pm 1,5)$ см.; $(16 \pm 1,5) \times (24 \pm 1,5)$ см.; $(16 \pm 1,5) \times (26 \pm 1,5)$ см.; $(18 \pm 1,5) \times (22 \pm 1,5)$ см.; $(18 \pm 1,5) \times (24 \pm 1,5)$ см.; $(18 \pm 1,5) \times (26 \pm 1,5)$ см) - не более 2 шт.

9. Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014, производства ООО "ХБК Навтекс" РУ № РЗН 2015/2557 (Варианты исполнения: 2м х 3см, 2м х 5см, 2м х 7см, 2м х 8,5см, 2м х 10см, 3м х 3см, 3м х 5см, 3м х 7см, 3м х 8,5см, 3м х 10см, 4м х 3см, 4м х 4см, 4м х 5см, 4м х 7см, 4м х 8,5см, 4м х 10см, 5м х 3см, 5м х 4см, 5м х 5см, 5м х 7см, 5м х 8,5см, 5м х 10см, 7м х 5см, 7м х 7см, 7м х 8,5см, 7м х 10см, 7м х 12см, 7м х 14см, 10м х 5см, 10м х 7см, 10м х 8,5см, 10м х 10см, 10м х 16см) - не более 5 шт.

10. Салфетка (Варианты исполнения: SS 001; SS 002; SS 003; SS 004; SS 005; SS 006; SS 007; SS 008; SS 009; SS 010; SS 011; SS 012; SS 013; SS 014; SS 015; SS 016; SS 017; SS 018; SS 019; SS 020; SS 021; SS 022; SS 023; SS 024; SS 025; SS 026; SS 027; SS 028; SS 029; SS 030; SS 031; SS 032; SS 033; SS 034; SS 035; SS 036; SS 037; SS 038; SS 039; SS 040; SS 041; SS 042; SS 043; SS 044; SS 045; SS 046; SS 047; SS 048; SS 049; SS 050; SS 051; SS 052; SS 053; SS 054; SS 055; SS 056; SS 057; SS 058; SS 059; SS 060; SS 061; SS 062; SS 063; SS 064; SS 065) - не более 30 шт.

11. Полотенце (Варианты исполнения: SM 001; SM 002; SM 003; SM 004; SM 005; SM 006; SM 007; SM 008; SM 009; SM 010; SM 011; SM 012; SM 013; SM 014; SM 015; SM 016; SM 017; SM 018; SM 019; SM 020; SM 021; SM 022; SM 023; SM 024; SM 025; SM 026; SM 027; SM 028; SM 029; SM 030; SM 031; SM 032; SM 033; SM 034; SM 035; SM 036; SM 037; SM 038; SM 039; SM 040; SM 041; SM 042; SM 043; SM 044; SM 045; SM 046; SM 047; SM 048; SM 049; SM 050; SM 051; SM 052; SM 053; SM 054; SM 055; SM 056; SM 057; SM 058; SM 059; SM 060; SM 061; SM 062; SM 063; SM 064; SM 065; SM 066; SM 067; SM 068; SM 069; SM 070; SM 071; SM 072; SM 073; SM 074; SM 075; SM 076; SM 077; SM 078; SM 079; SM 080; SM 081; SM 082; SM 083; SM 084; SM 085; SM 086; SM 087; SM 088; SM 089; SM 090; SM 091; SM 092; SM 093; SM 094; SM 095; SM 096; SM 097; SM 098; SM 099; SM 100; SM 101; SM 102; SM 103; SM 104; SM 105; SM 106; SM 107; SM 108; SM 109; SM 110; SM 111; SM 112; SM 113; SM 114; SM 115; SM 116; SM 117; SM 118; SM 119; SM 120; SM 121; SM 122; SM 123; SM 124; SM 125; SM 126; SM 127; SM 128; SM 129; SM 130; SM 131; SM 132; SM 133; SM 134; SM 135; SM 136; SM 137; SM 138; SM 139; SM 140; SM 141; SM 142; SM 143; SM 144; SM 145; SM 146; SM 147; SM 148; SM 149; SM 150; SM 151; SM 152; SM 153; SM 154; SM 155; SM 156; SM 157; SM 158; SM 159; SM 160; SM 161; SM 162; SM 163; SM 164; SM 165; SM 166; SM 167; SM 168; SM 169; SM 170; SM 171) - не более 10 шт.

12. Тампон (Варианты исполнения: круглый или треугольный, исполнения по размерам: ТТ 001; ТТ 002; ТТ 003; ТТ 004; ТТ 005; ТК 001; ТК 002; ТК 003; ТК 004; ТК 005; ТК 009) - не более 50 шт.

13. Подстилка (пеленка) (Варианты исполнения по размерам: PP 001; PP 002; PP 003; PP 004; PP 005; PP 006; PP 007; PP 008; PP 009; PP 010; PP 011; PP 012; PP 013; PP 014; PP 015; PP 016; PP 017; PP 018; PP 019; PP 020; PP 021; PP 022; PP 023; PP 024; PP 025; PP 026; PP 027; PP 028; PP 029; PP 030; PP 031; PP 032; PP 033; PP 034; PP 035; PP 036; PP 037; PP 038; PP 039; PP 040; PP 041; PP 042; PP 043; PP 044; PP 045; PP 046; PP 047; PP 048; PP 049; PP 050; PP 051; PP 052; PP 053; PP 054; PP 055; PP 056; PP 057; PP 058; PP 059; PP 060; PP 061; PP 062; PP 063; PP 064; PP 065; PP 066; PP 067; PP 068; PP 069; PP 070; PP 071; PP 072; PP 073; PP 074; PP 075; PP 076; PP 077; PP 078; PP 079; PP 080; PP 081; PP 082; PP 083; PP 084; PP 085; PP 086; PP 087; PP 088; PP 089; PP 090) - не более 5 шт.

14. Простыня хирургическая тип А (Варианты исполнения: с/без полотна на дугу, с/без липкого края на дугу, с/без фиксатора предметов, с/без встроенных бахил, с/без боковых вставок, с/без кармана, с/без отвода, с/без впитывающей зоны, с/без липкого края, с/без операционной пленки, отверстие по исполнению 1 или 2, исполнения по габаритным размерам: PA 001; PA 002; PA 003; PA 004; PA 005; PA 006; PA 007; PA 008; PA 009; PA 010; PA 011; PA 012; PA 013; PA 014; PA 015; PA 016; PA 017; PA 018; PA 019; PA 020; PA 021; PA 022; PA 023; PA 024; PA 025; PA 026; PA 027; PA 028; PA 029; PA 030; PA

131; PA 032; PA 033; PA 034; PA 035; PA 036; PA 037; PA 038; PA 039; PA 040; PA 041; PA 042; PA 043; PA 044; PA 045; PA 046; PA 047; PA 048; PA 049; PA 050; PA 051; PA 052; PA 053; PA 054; PA 055; PA 056; PA 057; PA 058; PA 059; PA 060; PA 061; PA 062; PA 063; PA 064; PA 065; PA 066; PA 067; PA 068; PA 069; PA 070; PA 071; PA 072; PA 073; PA 074; PA 075; PA 076; PA 077; PA 078; PA 079; PA 080; PA 081; PA 082; PA 083; PA 084; PA 085; PA 086; PA 087; PA 088; PA 089; PA 090; PA 091; PA 092; PA 093; PA 094; PA 095; PA 096; PA 097; PA 098; PA 099; PA 100; PA 101; PA 102; PA 103; PA 104; PA 105; PA 106; PA 107; PA 108; PA 109; PA 110; PA 111; PA 112; PA 113; PA 114; PA 115; PA 116; PA 117; PA 118; PA 119; PA 120; PA 121; PA 122; PA 123; PA 124; PA 125; PA 126; PA 127; PA 128; PA 129; PA 130; PA 131; PA 132; PA 133; PA 134; PA 135; PA 136; PA 137; PA 138; PA 139; PA 140; PA 141; PA 142; PA 143; PA 144; PA 145; PA 146; PA 147; PA 148; PA 149; PA 150; PA 151; PA 152; PA 153; PA 154; PA 155; PA 156; PA 157; PA 158; PA 159; PA 160; PA 161; PA 162; PA 163; PA 164; PA 165; PA 166; PA 167; PA 168; PA 169; PA 170; PA 171; PA 172; PA 173; PA 174; PA 175; PA 176; PA 177; PA 178; PA 179; PA 180; PA 181; PA 182; PA 183; PA 184; PA 185; PA 186; PA 187; PA 188; PA 189; PA 190; PA 191; PA 192; PA 193; PA 194; PA 195; PA 196; PA 197; PA 198; PA 199; PA 200; PA 201; PA 202; PA 203; PA 204; PA 205; PA 206; PA 207; PA 208; PA 209; PA 210; PA 211; PA 212; PA 213; PA 214; PA 215; PA 216; PA 217; PA 218; PA 219; PA 220; PA 221; PA 222; PA 223; PA 224; PA 225; PA 226; PA 227; PA 228; PA 229; PA 230; PA 231; PA 232; PA 233; PA 234; PA 235; PA 236; PA 237; PA 238; PA 239; PA 240; PA 241; PA 242; PA 243; PA 244; PA 245; PA 246; PA 247; PA 248; PA 249; PA 250; PA 251; PA 252; PA 253; PA 254; PA 255; PA 256; PA 257; PA 258; PA 259; PA 260; PA 261; PA 262; PA 263; PA 264; PA 265; PA 266; PA 267; PA 268; PA 269; PA 270; PA 271; PA 272; PA 273; PA 274; PA 275; PA 276; PA 277; PA 278; PA 279; PA 280; PA 281; PA 282; PA 283; PA 284; PA 285; PA 286; PA 287; PA 288; PA 289; PA 290; PA 291; PA 292; PA 293; PA 294; PA 295; PA 296; PA 297; PA 298; PA 299; PA 300, исполнения по размерам отверстия: OA 001; OA 002; OA 003; OA 004; OA 005; OA 006; OA 007; OA 008; OA 009; OA 010; OA 011; OA 012; OA 013; OA 014; OA 015; OA 016; OA 017; OA 018; OA 019; OA 020; OA 021; OA 022; OA 023; OA 024; OA 025; OA 026; OA 027; OA 028; OA 029; OA 030; OA 031; OA 032; OA 033; OA 034; OA 035; OA 036; OA 037; OA 038; OA 039; OA 040; OA 041; OA 042; OA 043; OA 044; OA 045; OA 046; OA 047; OA 048; OA 049; OA 050; OA 051; OA 052; OA 053; OA 054; OA 055; OA 056; OA 057; OA 058; OA 059; OA 060; OA 061; OA 062; OA 063; OA 064; OA 065; OA 066; OA 067; OA 068; OA 069; OA 070; OA 071; OA 072; OA 073; OA 074; OA 075; OA 076; OA 077; OA 078; OA 079; OA 080; OA 081; OA 082; OA 083; OA 084; OA 085; OA 086; OA 087; OA 088; OA 089; OA 090; OA 091; OA 092; OA 093; OA 094; OA 095; OA 096; OA 097; OA 098; OA 099; OA 100; OA 101; OA 102; OA 103; OA 104; OA 105; OA 106; OA 107; OA 108; OA 109; OA 110; OA 111; OA 112; OA 113; OA 114; OA 115; OA 116; OA 117; OA 118; OA 119; OA 120; OA 121; OA 122; OA 123; OA 124; OA 125; OA 126; OA 127; OA 128; OA 129; OA 130; OA 131; OA 132; OA 133; OA 134; OA 135; OA 136; OA 137; OA 138; OA 139; OA 140; OA 141; OA 142; OA 143; OA 144; OA 145; OA 146; OA 147; OA 148; OA 149; OA 150; OA 151; OA 152; OA 153; OA 154; OA 155; OA 156; OA 157; OA 158; OA 159; OA 160; OA 161; OA 162; OA 163; OA 164; OA 165; OA 166; OA 167; OA 168; OA 169; OA 170; OA 171; OA 172; OA 173; OA 174; OA 175; OA 176; OA 177; OA 178; OA 179; OA 180; OA 181; OA 182; OA 183; OA 184; OA 185; OA 186; OA 187; OA 188; OA 189; OA 190; OA 191; OA 192; OA 193; OA 194; OA 195; OA 196; OA 197; OA 198; OA 199; OA 200; OA 201; OA 202; OA 203; OA 204; OA 205; OA 206; OA 207; OA 208; OA 209; OA 210; OA 211; OA 212; OA 213; OA 214; OA 215; OA 216; OA 217; OA 218; OA 219; OA 220; OA 221; OA 222; OA 223; OA 224; OA 225; OA 226; OA 227; OA 228; OA 229; OA 230; OA 231; OA 232; OA 233; OA 234; OA 235; OA 236; OA 237; OA 238; OA 239; OA 240; OA 241; OA 242; OA 243; OA 244; OA 245; OA 246; OA 247; OA 248; OA 249; OA 250; OA 251; OA 252; OA 253; OA 254; OA 255; OA 256; OA 257; OA 258; OA 259; OA 260; OA 261; OA 262; OA 263; OA 264; OA 265; OA 266; OA 267; OA 268; OA 269; OA 270; OA 271; OA 272; OA 273; OA 274; OA 275; OA 276; OA 277; OA 278; OA 279; OA 280; OA 281; OA 282; OA 283; OA 284; OA 285; OA 286; OA 287; OA 288; OA 289; OA 290; OA 291; OA 292; OA 293; OA 294; OA 295; OA 296; OA 297; OA 298; OA 299; OA 300; OA 301; OA 302; OA 303; OA 304; OA 305; OA 306; OA 307; OA 308; OA 309; OA 310; OA 311; OA 312; OA 313; OA 314; OA 315; OA 316; OA 317; OA 318; OA 319; OA 320; OA 321; OA 322; OA 323; OA 324; OA 325; OA 326; OA 327; OA 328; OA 329) тип В (Варианты исполнения: с одним или с двумя отверстиями, с/без

индикатора предметов, с/без шторки, с/без кармана, с/без впитывающей зоны, с/без липкого края, с/без перационной пленки, отверстие по исполнению 1 или 2, исполнения по габаритным размерам: PB 001; PB 002; PB 003; PB 004; PB 005; PB 006; PB 007; PB 008; PB 009; PB 010; PB 011; PB 012; PB 013; PB 014; PB 015; PB 016; PB 017; PB 018; PB 019; PB 020; PB 021; PB 022; PB 023; PB 024; PB 025; PB 026; PB 027; PB 028; PB 029; PB 030; PB 031; PB 032; PB 033; PB 034; PB 035; PB 036; PB 037; PB 038; PB 039; PB 040; PB 041; PB 042; PB 043; PB 044; PB 045; PB 046; PB 047; PB 048; PB 049; PB 050; PB 051; PB 052; PB 053; PB 054; PB 055; PB 056; PB 057; PB 058; PB 059; PB 060; PB 061; PB 062; PB 063; PB 064; PB 065; PB 066; PB 067; PB 068; PB 069; PB 070; PB 071; PB 072; PB 073; PB 074; PB 075; PB 076; PB 077; PB 078; PB 079; PB 080; PB 081; PB 082; PB 083; PB 084; PB 085; PB 086; PB 087; PB 088; PB 089; PB 090; PB 091; PB 092; PB 093; PB 094; PB 095; PB 096; PB 097; PB 098; PB 099; PB 100; PB 101; PB 102; PB 103; PB 104; PB 105; PB 106; PB 107; PB 108; PB 109; PB 110; PB 111; PB 112; PB 113; PB 114; PB 115; PB 116; PB 117; PB 118; PB 119; PB 120; PB 121; PB 122; PB 123; PB 124; PB 125; PB 126; PB 127; PB 128; PB 129; PB 130, исполнения по размерам отверстия: OB 001; OB 002; OB 003; OB 004; OB 005; OB 006; OB 007; OB 008; OB 009; OB 010; OB 011; OB 012; OB 013; OB 014; OB 015; OB 016; OB 017; OB 018; OB 019; OB 020; OB 021; OB 022; OB 023; OB 024; OB 025; OB 026; OB 027; OB 028; OB 029; OB 030; OB 031; OB 032; OB 033; OB 034; OB 035; OB 036; OB 037; OB 038; OB 039; OB 040; OB 041; OB 042; OB 043; OB 044; OB 045; OB 046; OB 047; OB 048; OB 049; OB 050; OB 051; OB 052; OB 053; OB 054; OB 055; OB 056; OB 057; OB 058; OB 059; OB 060; OB 061; OB 062; OB 063; OB 064; OB 065; OB 066; OB 067; OB 068; OB 069; OB 070; OB 071; OB 072; OB 073; OB 074; OB 075; OB 076; OB 077; OB 078; OB 079; OB 080; OB 081; OB 082; OB 083; OB 084; OB 085; OB 086; OB 087; OB 088; OB 089; OB 090; OB 091; OB 092; OB 093; OB 094; OB 095; OB 096; OB 097; OB 098; OB 099; OB 100; OB 101; OB 102; OB 103; OB 104; OB 105; OB 106; OB 107; OB 108; OB 109; OB 110; OB 111; OB 112; OB 113; OB 114; OB 115; OB 116; OB 117; OB 118; OB 119; OB 120; OB 121; OB 122; OB 123; OB 124; OB 125; OB 126; OB 127; OB 128; OB 129; OB 130; OB 131; OB 132; OB 133; OB 134; OB 135; OB 136; OB 137; OB 138; OB 139; OB 140; OB 141; OB 142; OB 143) - не более 2 шт.

15. Простыня универсальная (Варианты исполнения: с/без липкого края, исполнения по размерам: PU 001; PU 002; PU 003; PU 004; PU 005; PU 006; PU 007; PU 008; PU 009; PU 010; PU 011; PU 012; PU 013; PU 014; PU 015; PU 016; PU 017; PU 018; PU 019; PU 020; PU 021; PU 022; PU 023; PU 024; PU 025; PU 026; PU 027; PU 028; PU 029; PU 030; PU 031; PU 032; PU 033; PU 034; PU 035; PU 036; PU 037; PU 038; PU 039; PU 040; PU 041; PU 042; PU 043; PU 044; PU 045; PU 046; PU 047; PU 048; PU 049; PU 050; PU 051; PU 052; PU 053; PU 054; PU 055; PU 056; PU 057; PU 058; PU 059; PU 060; PU 061; PU 062; PU 063; PU 064; PU 065; PU 066; PU 067; PU 068; PU 069; PU 070; PU 071; PU 072; PU 073; PU 074; PU 075; PU 076; PU 077; PU 078; PU 079; PU 080; PU 081; PU 082; PU 083; PU 084; PU 085; PU 086; PU 087; PU 088; PU 089; PU 090; PU 091; PU 092; PU 093; PU 094; PU 095; PU 096; PU 097; PU 098; PU 099; PU 100; PU 101; PU 102; PU 103; PU 104; PU 105; PU 106; PU 107; PU 108; PU 109; PU 110; PU 111; PU 112; PU 113; PU 114; PU 115; PU 116; PU 117; PU 118; PU 119; PU 120; PU 121; PU 122; PU 123; PU 124; PU 125; PU 126; PU 127; PU 128; PU 129; PU 130; PU 131; PU 132; PU 133; PU 134; PU 135; PU 136; PU 137; PU 138; PU 139; PU 140; PU 141; PU 142; PU 143; PU 144; PU 145; PU 146; PU 147; PU 148; PU 149; PU 150; PU 151; PU 152; PU 153; PU 154; PU 155; PU 156; PU 157; PU 158; PU 159; PU 160; PU 161; PU 162; PU 163; PU 164; PU 165; PU 166; PU 167; PU 168; PU 169; PU 170; PU 171; PU 172; PU 173; PU 174; PU 175; PU 176; PU 177; PU 178; PU 179; PU 180; PU 181; PU 182; PU 183; PU 184; PU 185; PU 186; PU 187; PU 188; PU 189; PU 190; PU 191; PU 192; PU 193; PU 194; PU 195; PU 196; PU 197; PU 198; PU 199; PU 200; PU 201; PU 202; PU 203; PU 204; PU 205; PU 206; PU 207; PU 208; PU 209; PU 210; PU 211; PU 212; PU 213; PU 214; PU 215; PU 216; PU 217; PU 218; PU 219; PU 220; PU 221; PU 222; PU 223; PU 224; PU 225; PU 226; PU 227; PU 228; PU 229; PU 230; PU 231; PU 232; PU 233; PU 234; PU 235; PU 236; PU 237; PU 238; PU 239; PU 240; PU 241) - не более 5 шт.

16. Простыня с вырезом (Варианты исполнения: с/без липкого края, с/без перинеального покрытия, с/без впитывающей зоной, исполнения по габаритным размерам: PV 001; PV 002; PV 003; PV 004; PV 005; PV 006; PV 007; PV 008; PV 009; PV 010; PV 011; PV 012; PV 013; PV 014; PV 015; PV 016; PV 017; PV 018; PV 019; PV 020; PV 021; PV 022; PV 023; PV 024; PV 025; PV 026; PV 027; PV 028; PV

29; PV 030; PV 031; PV 032; PV 033; PV 034; PV 035; PV 036; PV 037; PV 038; PV 039; PV 040; PV 041; PV 042; PV 043; PV 044; PV 045; PV 046; PV 047; PV 048; PV 049; PV 050; PV 051; PV 052; PV 053; PV 054; PV 055; PV 056; PV 057; PV 058; PV 059; PV 060; PV 061; PV 062; PV 063; PV 064; PV 065; PV 066; PV 067; PV 068; PV 069; PV 070; PV 071; PV 072; PV 073; PV 074; PV 075; PV 076; PV 077; PV 078; PV 079; PV 080; PV 081; PV 082; PV 083; PV 084; PV 085; PV 086; PV 087; PV 088; PV 089; PV 090; PV 091; PV 092; PV 093; PV 094; PV 095; PV 096; PV 097; PV 098; PV 099; PV 100; PV 101; PV 102; PV 103; PV 104; PV 105; PV 106; PV 107; PV 108; PV 109; PV 110; PV 111; PV 112; PV 113; PV 114; PV 115; PV 116; PV 117; PV 118; PV 119; PV 120; PV 121; PV 122; PV 123; PV 124; PV 125; PV 126; PV 127; PV 128; PV 129; PV 130; PV 131; PV 132; PV 133; PV 134; PV 135; PV 136; PV 137; PV 138; PV 139; PV 140; PV 141; PV 142; PV 143; PV 144; PV 145; PV 146; PV 147; PV 148; PV 149; PV 150; PV 151; PV 152; PV 153; PV 154; PV 155; PV 156; PV 157; PV 158; PV 159; PV 160; PV 161; PV 162; PV 163; PV 164; PV 165; PV 166; PV 167; PV 168; PV 169; PV 170; PV 171; PV 172; PV 173; PV 174; PV 175; PV 176; PV 177; PV 178; PV 179; PV 180; PV 181; PV 182; PV 183; PV 184; PV 185; PV 186; PV 187; PV 188; PV 189; PV 190; PV 191; PV 192; PV 193; PV 194; PV 195; PV 196; PV 197; PV 198; PV 199; PV 200; PV 201; PV 202; PV 203; PV 204, исполнения по размерам отверстия: VP 001; VP 002; VP 003; VP 004; VP 005; VP 006; VP 007; VP 008; VP 009; VP 010; VP 011; VP 012; VP 013; VP 014; VP 015; VP 016; VP 017; VP 018; VP 019; VP 020; VP 021; VP 022; VP 023; VP 024; VP 025; VP 026; VP 027; VP 028; VP 029; VP 030; VP 031; VP 032; VP 033; VP 034; VP 035; VP 036; VP 037; VP 038; VP 039; VP 040; VP 041; VP 042; VP 043; VP 044; VP 045; VP 046; VP 047; VP 048; VP 049; VP 050; VP 051; VP 052; VP 053; VP 054; VP 055; VP 056; VP 057; VP 058; VP 059; VP 060; VP 061; VP 062; VP 063; VP 064; VP 065; VP 066; VP 067; VP 068; VP 069; VP 070; VP 071; VP 072; VP 073; VP 074; VP 075; VP 076; VP 077; VP 078; VP 079; VP 080; VP 081; VP 082; VP 083; VP 084; VP 085; VP 086; VP 087) - не более 5 шт.

17. Бахила операционная (Варианты исполнения: с/без липкого края, (Варианты исполнения по размерам: B 001; B 002; B 003; B 004; B 005; B 006; B 007; B 008; B 009; B 010; B 011; B 012; B 013; B 014; B 015; B 016; B 017; B 018; B 019; B 020; B 021; B 022; B 023; B 024; B 025; B 026; B 027; B 028; B 029; B 030; B 031; B 032; B 033; B 034; B 035; B 036; B 037; B 038; B 039; B 040; B 041; B 042; B 043; B 044; B 045; B 046; B 047; B 048; B 049; B 050; B 051; B 052; B 053; B 054; B 055; B 056; B 057) - не более 5 шт.

18. Операционная пленка (Варианты исполнения: OP 001; OP 002; OP 003; OP 004; OP 005; OP 006; OP 007; OP 008; OP 009; OP 010; OP 011; OP 012; OP 013; OP 014; OP 015; OP 016; OP 017; OP 018; OP 019; OP 020; OP 021; OP 022; OP 023; OP 024; OP 025; OP 026; OP 027; OP 028; OP 029; OP 030; OP 031; OP 032; OP 033; OP 034; OP 035; OP 036; OP 037; OP 038; OP 039; OP 040; OP 041; OP 042; OP 043; OP 044; OP 045; OP 046; OP 047; OP 048; OP 049; OP 050; OP 051; OP 052; OP 053; OP 054; OP 055; OP 056; OP 057; OP 058; OP 059; OP 060; OP 061; OP 062; OP 063; OP 064; OP 065; OP 066; OP 067; OP 068; OP 069; OP 070; OP 071; OP 072; OP 073; OP 074; OP 075; OP 076; OP 077; OP 078; OP 079; OP 080; OP 081; OP 082; OP 083; OP 084; OP 085; OP 086; OP 087; OP 088; OP 089; OP 090; OP 091; OP 092; OP 093; OP 094; OP 095; OP 096; OP 097; OP 098; OP 099; OP 100; OP 101; OP 102; OP 103; OP 104; OP 105; OP 106; OP 107; OP 108; OP 109; OP 110; OP 111; OP 112; OP 113; OP 114; OP 115; OP 116; OP 117; OP 118; OP 119; OP 120; OP 121; OP 122; OP 123; OP 124; OP 125; OP 126; OP 127; OP 128; OP 129; OP 130; OP 131; OP 132; OP 133; OP 134; OP 135; OP 136; OP 137; OP 138; OP 139; OP 140; OP 141; OP 142; OP 143; OP 144; OP 145; OP 146; OP 147; OP 148) - не более 5 шт.

19. Чехол на аппаратуру тип А (Варианты исполнения: DA 001; DA 002; DA 003; DA 004; DA 005; DA 006; DA 007; DA 008; DA 009; DA 010; DA 011; DA 012; DA 013; DA 014; DA 015; DA 016; DA 017; DA 018; DA 019; DA 020; DA 021) тип В (Варианты исполнения: с/без держателя, с/без липкого края, исполнения по размерам: DB 001; DB 002; DB 003; DB 004; DB 005; DB 006; DB 007; DB 008; DB 009; DB 010; DB 011; DB 012; DB 013; DB 014; DB 015; DB 016; DB 017; DB 018; DB 019; DB 020; DB 021; DB 022; DB 023; DB 024; DB 025; DB 026; DB 027; DB 028; DB 029; DB 030; DB 031; DB 032; DB 033; DB 034; DB 035; DB 036; DB 037; DB 038; DB 039; DB 040; DB 041; DB 042; DB 043; DB 044; DB 045; DB 046; DB 047; DB 048; DB 049; DB 050; DB 051; DB 052; DB 053; DB 054; DB 055; DB 056; DB 057; DB 058; DB 059; DB 060; DB 061; DB 062; DB 063; DB 064; DB 065; DB 066; DB 067; DB 068; DB

69; DB 070; DB 071; DB 072; DB 073; DB 074; DB 075; DB 076; DB 077; DB 078; DB 079; DB 080; DB 81; DB 082) тип С (Варианты исполнения: DC 001; DC 002; DC 003; DC 004; DC 005; DC 006; DC 007; DC 008; DC 009; DC 010) - не более 5 шт.

20. Чехол на инструментальный столлик (Варианты исполнения: с/без впитывающей зоны исполнения по размерам: CH 001; CH 002; CH 003; CH 004; CH 005; CH 006; CH 007; CH 008; CH 009; CH 010; CH 011; CH 012; CH 013; CH 014; CH 015; CH 016; CH 017; CH 018; CH 019; CH 020; CH 021; CH 022; CH 023; CH 024; CH 025; CH 026; CH 027; CH 028; CH 029; CH 030; CH 031; CH 032; CH 033; CH 034; CH 035; CH 036; CH 037; CH 038; CH 039; CH 040; CH 041; CH 042; CH 043; CH 044; CH 045; CH 046; CH 047; CH 048; CH 049; CH 050; CH 051; CH 052; CH 053; CH 054; CH 055; CH 056; CH 057; CH 058; CH 059; CH 060) - не более 3 шт.

21. Шапочка тип А (Варианты исполнения: А1, А2, А3), тип В (Варианты исполнения: В1, В2, В3, В4), тип С (Варианты исполнения: С1, С2, С3) - не более 5 шт.

22. Перчатки хирургические, варианты исполнения: 22.1 Перчатки хирургические и мотровые, стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2011 производства ООО "Русская Медицинская Пакетовка", Россия РУ № ФСР 2011/12244. (Следующих типоразмеров: 1) Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 2) Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0. 3) Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса опудренные №№ 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0). 22.2 Перчатки Sover хирургические стерильные по ТУ 2514-003-56247575-2016 производства ООО "ТРУНДЛАГЕ", Россия, РЗН 2017/5568. Варианты исполнения: 1) Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0. 2) Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса опудренные текстурированные одинарного хлорирования анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0. 3) Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные с полимерным покрытием текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0. 4) Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные текстурированные двойного хлорирования анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0. 5) Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые нитрильные (нитриловые) неопудренные текстурированные анатомической формы с венчиком, размеры 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0. 6) Перчатки Sover ULTRA хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные без венчика натурального или пестрого цветов, размеры 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0. 7) Перчатки Sover хирургические стерильные одноразовые из натурального латекса неопудренные анатомической формы с полимерным покрытием текстурированные с венчиком и без венчика с удлиненной крагой, размеры 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10.0) - не более 5 пар

23. Карман-приемник (Варианты исполнения: количество секций кармана: 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 или 10; исполнения по размерам: КР 001; КР 002; КР 003; КР 004; КР 005; КР 006; КР 007; КР 008; КР 009; КР 010; КР 011; КР 012; КР 013; КР 014; КР 015; КР 016; КР 017; КР 018; КР 019; КР 020; КР 021; КР 022; КР 023; КР 024; КР 025; КР 026; КР 027; КР 028; КР 029; КР 030; КР 031; КР 032; КР 033; КР 034; КР 035; КР 036; КР 037; КР 038; КР 039; КР 040; КР 041; КР 042; КР 043; КР 044; КР 045; КР 046; КР 047; КР 048; КР 049; КР 050; КР 051; КР 052; КР 053; КР 054; КР 055; КР 056; КР 057; КР 058; КР 059; КР 060; КР 061; КР 062; КР 063; КР 064; КР 065; КР 066; КР 067; КР 068; КР 069; КР 070; КР 071; КР 072; КР 073; КР 074; КР 075; КР 076; КР 077; КР 078; КР 079; КР 080; КР 081; КР 082; КР 083; КР 084; КР 085; КР 086; КР 087; КР 088; КР 089; КР 090; КР 091; КР 092; КР 093; КР 094; КР 095; КР 096; КР 097; КР 098; КР 099; КР 100; КР 101; КР 102; КР 103; КР 104; КР 105; КР 106; КР 107; КР 108; КР 109; КР 110; КР 111) - не более 5 шт.

24. Мешок (Варианты исполнения: М 001; М 002; М 003; М 004; М 005; М 006; М 007; М 008; М 009; М 010; М 011; М 012; М 013; М 014; М 015; М 016; М 017; М 018; М 019; М 020; М 021; М 022; М

23; M 024; M 025; M 026; M 027; M 028; M 029; M 030; M 031; M 032; M 033; M 034; M 035; M 036; M 037; M 038; M 039; M 040; M 041; M 042; M 043; M 044; M 045; M 046; M 047; M 048; M 049; M 050; M 051) - не более 5 шт.

25. Халат хирургический (Варианты исполнения: горловина на завязках или на застёжке, с/без дополнительной зоны, с/без барьера, рукава на резинке или на манжете; исполнения по размерам: G44-1.0; G44-1.1; G44-1.2; G44-1.3; G44-1.4; G44-1.5; G44-1.6; G46-1.0; G46-1.1; G46-1.2; G46-1.3; G46-1.4; G46-1.5; G46-1.6; G48-1.0; G48-1.1; G48-1.2; G48-1.3; G48-1.4; G48-1.5; G48-1.6; G50-1.0; G50-1.1; G50-1.2; G50-1.3; G50-1.4; G50-1.5; G50-1.6; G52-1.0; G52-1.1; G52-1.2; G52-1.3; G52-1.4; G52-1.5; G52-1.6; G54-1.0; G54-1.1; G54-1.2; G54-1.3; G54-1.4; G54-1.5; G54-1.6; G56-1.0; G56-1.1; G56-1.2; G56-1.3; G56-1.4; G56-1.5; G56-1.6; G58-1.0; G58-1.1; G58-1.2; G58-1.3; G58-1.4; G58-1.5; G58-1.6; G60-1.0; G60-1.1; G60-1.2; G60-1.3; G60-1.4; G60-1.5; G60-1.6; G62-1.0; G62-1.1; G62-1.2; G62-1.3; G62-1.4; G62-1.5; G62-1.6; G64-1.0; G64-1.1; G64-1.2; G64-1.3; G64-1.4; G64-1.5; G64-1.6; G66-1.0; G66-1.1; G66-1.2; G66-1.3; G66-1.4; G66-1.5; G66-1.6) - не более 5 шт.

26. Фартук (Варианты исполнения: на завязках или цельнокроеный, исполнения по размерам: F01; F02; F03; F04; F05; F06; F07; F08; F09; F10; F11; F12; F13; F14; F15; F16; F17; F18; F19; F20; F21; F22; F23; F24) - не более 10 шт.

27. Наручники (Варианты исполнения: на манжете или на резинке исполнения по размерам N01; N02; N03) - не более 5 пар

28. Бахилы (Варианты исполнения: с/без дополнительной подошвы, на резинке или на завязках, исполнения по размерам B01; B02; B03; B04; B05; B06; B07; B08; B09; B10; B11; B12; B13; B14; B15; B16; B17; B18; B19; B20; B21; B22) - не более 10 пар

29. Маски медицинские из нетканых материалов стерильные «ГЕКСА» по ТУ 9398-017-18603495-2010 производства ООО "Текса-нетканые материалы" РУ № ФСР 2010/09436 (Варианты исполнения: 1) Маска медицинская из нетканых материалов стерильная «ГЕКСА» (двухслойная, на резинке, голубая); 2) Маска медицинская из нетканых материалов стерильная «ГЕКСА» (двухслойная, на завязках, голубая); 3) Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (двухслойная, на резинке, голубая); 4) Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная «ГЕКСА» (двухслойная, на завязках, голубая); 5) Маска медицинская из нетканых материалов стерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на резинке, голубая); 6) Маска медицинская из нетканых материалов стерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на завязках, голубая); 7) Маска медицинская из нетканых материалов стерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на резинке, с рисунком); 8) Маска медицинская из нетканых материалов стерильная «ГЕКСА» (трёхслойная, на завязках, с рисунком)) - не более 10 шт.

30. Фиксатор предметов (Варианты исполнения: FP 001; FP 002; FP 003; FP 004; FP 005; FP 006; FP 007; FP 008; FP 009; FP 010; FP 011; FP 012; FP 013; FP 014; FP 015; FP 016; FP 017; FP 018; FP 019; FP 020; FP 021; FP 022; FP 023; FP 024; FP 025; FP 026; FP 027; FP 028; FP 029; FP 030; FP 031; FP 032; FP 033; FP 034; FP 035; FP 036) - не более 10 шт.

1.4 Техническое описание, параметры и характеристики

1.4.1 Габаритные и основные размеры изделий, входящих в состав набора представлены в приложении А. Предельное отклонение размеров изделий: $\pm 10\%$ от номинального размера изделий.

1.4.2 Характеристика изделий набора соответствуют нормам, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Технические требования к изделиям набора.

Название изделий	Наименование параметра	Норма
Повязка	Сопротивление отслаиванию липкого слоя, Н/м,	не менее 25 не более 200
Бинт фиксирующий с неосыпающимися краями	Растяжимость, %	не менее 100
Бинт марлевый	Прочность на растяжение, Н	не менее 59

Название изделий	Наименование параметра	Норма
Салфетка	Абсорбционная емкость, %	не менее 100 %
Полотенце	Абсорбционная емкость, %	не менее 100 %
Тампон	Абсорбционная емкость, %	не менее 300 %
Подстилка (пеленка)	Абсорбционная емкость, %	не менее 300 %
Простыня хирургическая	Абсорбционная емкость впитывающей зоны, %	не менее 100
	Прочность на растяжение, Н	не менее 20
	Сопротивление отслаиванию липкого слоя и операционной пленки, Н/м,	не менее 25 не более 200
Простыня универсальная	Прочность на растяжение, Н	не менее 20
	Сопротивление отслаиванию липкого слоя и операционной пленки, Н/м,	не менее 25 не более 200
Простыня с вырезом	Абсорбционная емкость впитывающей зоны, %	не менее 100
	Прочность на растяжение, Н	не менее 20
	Сопротивление отслаиванию липкого слоя и операционной пленки, Н/м,	не менее 25 не более 200
Бахила операционная	Прочность при растяжении шва, Н	не менее 10
Операционная пленка	Сопротивление отслаиванию липкого слоя, Н/м,	не менее 25 не более 200
Чехол на аппаратуру	Прочность при растяжении шва, Н	не менее 10
Чехол на инструментальный столик	Абсорбционная емкость впитывающей зоны, %	не менее 100
	Прочность при растяжении шва, Н	не менее 10
Карман-приемник	Прочность при растяжении шва, Н	не менее 10
Мешок	Прочность при растяжении шва, Н	не менее 10
Халат хирургический	Прочность на растяжение, Н	не менее 20
	Прочность при растяжении шва соединения завязок, Н	не менее 5 Н
Фартук	Прочность при растяжении шва соединения завязок, Н	не менее 5 Н
Нарукавники	Прочность при растяжении шва, Н	не менее 10 Н
Бахилы	Прочность при растяжении шва, Н	не менее 10Н
Фиксатор предметов	Сопротивление отслаиванию липкого слоя, Н/м,	не менее 30

1.4.2 Скрепление деталей изделий осуществляется клеевым методом лентой двусторонней или методом ультразвуковой сварки. Детали шапочки, бахил, нарукавников, халата хирургического скрепляются пошивом нитками из полиэфира. Швы деталей изделий ровные, без пропусков стежков и не имеют складок и сборок. Концы строчек закреплены, концы нитей не превышают 1,5 см.

1.4.3 Поверхность изделий набора не имеет внешних дефектов в виде вмятин, разрывов и других механических повреждений, а также пятен и производственных загрязнений.

1.4.4 Набор является стерильным. Стерилизация осуществляется газовым методом оксидом этилена.

1.4.5 Набор устойчив к воздействию климатических факторов:

– при транспортировании – температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

– при хранении – температуре от плюс 5°С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

1.5 Материалы и комплектующие

Изделия набора изготавливаются из материалов, представленных в таблице 2

Таблица 2 – Материалы изделий набора

№	Материал	Изготавливаемые детали изделий (наличие контакта с кожей человека)
	Полотно нетканое термоскрепленное марки СМС	Полотно повязки (контактирует) Подстилка (пеленка) (контактирует) Основное полотно простыни хирургической тип А (контактирует) Полотно на дугу простыни хирургической тип А (контактирует) Боковая вставка простыни хирургической тип А (контактирует) Полотно простыни хирургической тип В (контактирует) Шторка простыни хирургической тип В (контактирует) Простыня универсальная (контактирует) Полотно простыни с вырезом (контактирует) Перинеальное покрытие простыни с вырезом (контактирует) Полотно бахилы операционной (контактирует) Полотно шапочки, тип А (контактирует) Полотно шапочки, тип В (контактирует) Дно шапочки, тип В (контактирует) Бок шапочки, тип С (контактирует) Задник шапочки, тип С (контактирует) Перед шапочки, тип С (контактирует) Полочка халата хирургического (контактирует) Рукава халата хирургического (контактирует) Горловина халата хирургического (контактирует) Спинка халата хирургического (контактирует) Полотно бахил (контактирует) Полотно нарукавников (контактирует) Полотно фартука (контактирует)
	Полотно нетканое марки СС ламинированное	Подстилка (пеленка) (контактирует) Основное полотно простыни хирургической тип А (контактирует) Полотно на дугу простыни хирургической тип А (контактирует) Боковая вставка простыни хирургической тип А (контактирует) Полотно простыни хирургической тип В (контактирует) Шторка простыни хирургической тип В (контактирует) Простыня универсальная (контактирует) Полотно простыни с вырезом (контактирует) Перинеальное покрытие простыни с вырезом (контактирует) Полотно бахилы операционной (контактирует) Полотно чехла на аппаратуру, тип А (контактирует) Мешок Полочка халата хирургического (контактирует) Рукава халата хирургического (контактирует) Дополнительная зона халата хирургического (контактирует) Дополнительная подошва бахил (контактирует) Полотно нарукавников (контактирует) Полотно фартука (контактирует)
	Нетканый материал из химических нетей	Подстилка (пеленка) (контактирует) Основное полотно простыни хирургической тип А (контактирует)

№	Материал	Изготавливаемые детали изделий (наличие контакта с кожей человека)
		Полотно на дугу простыни хирургической тип А (контактирует) Боювая вставка простыни хирургической тип А (контактирует) Полотно простыни хирургической тип В (контактирует) Шторка простыни хирургической тип В (контактирует) Простыня универсальная (контактирует) Полотно простыни с вырезом (контактирует) Перинеальное покрытие простыни с вырезом (контактирует) Полотно бахилы операционной (контактирует) Дополнительная зона халата хирургического (контактирует)
	Материал нетканый «Спанлейс»	Салфетка (контактирует) Полотенце (контактирует) Тампон (контактирует) Полотно шапочки, тип А (контактирует) Полотно шапочки, тип В (контактирует) Дно шапочки, тип В (контактирует) Бок шапочки, тип С (контактирует) Задник шапочки, тип С (контактирует) Перед шапочки, тип С (контактирует) Впитывающая зона простыни хирургической тип А (контактирует) Впитывающая зона простыни хирургической тип В (контактирует) Впитывающая зона простыни с вырезом (контактирует) Впитывающая зона чехла на инструментальный столик
	Пленка полиэтиленовая марки Н по ГОСТ 10354	Карман простыни хирургической тип А, Отвод простыни хирургической тип А Карман простыни хирургической тип В, Полотно чехла на аппаратуру, тип А Рукав чехла на аппаратуру, тип В Рукав чехла на аппаратуру, тип С Рукав чехла на инструментальный столик Полотно карман-приемника Мешок Полотно фартука (контактирует) Полотно нарукавников (контактирует)
	Марля медицинская по ГОСТ 9412	Тампон (контактирует) Салфетка (контактирует)
7	Манжетная белая трубка из полиэфира	Манжеты рукавов халата хирургического (контактирует) Манжеты нарукавников (контактирует)
8	Резинка вязанная (полиэфир, латекс),	Резинка чехла на аппаратуру тип А Резинка шапочки тип А (контактирует) Резинка шапочки тип С (контактирует) Резинки рукавов халата хирургического (контактирует) Резинка бахил (контактирует) Резинка нарукавников (контактирует)
9	Лента петельная (липучка) (полиамид, полиэстер)	Фиксатор предметов простыни хирургической тип А Фиксатор предметов простыни хирургической тип В Застежка горловины халата хирургического (контактирует) Фиксатор
10	Картон по ГОСТ 7933	Барьер халата хирургического

№	Материал	Изготавливаемые детали изделий (наличие контакта с кожей человека)
		Держатель чехла на аппаратуру тип В
1	Лента двусторонняя гипоаллергенная с клеевым слоем на основе синтетического каучука	Липкий слой повязки (контактирует) Липкий край на дугу простыни хирургической тип А Липкий край простыни хирургической тип А (контактирует) Липкий край простыни хирургической тип В (контактирует) Липкий край простыни универсальной (контактирует) Липкий край простыни с вырезом (контактирует) Липкий край бахилы операционной (контактирует) Липкий край чехла на аппаратуру, тип В (контактирует) Липкий край карман-приемника Липкий край фиксатора
2	Полиэтилен низкого давления	Фланец чехла на аппаратуру тип С
3	Хирургическое однослойное покрытие (полиуретановое покрытие с акриловым клеем)	Операционная пленка простыни хирургической тип А (контактирует) Операционная пленка простыни хирургической тип В (контактирует) Операционная пленка (контактирует)

1.6 Комплект

В состав поставки набора должны входить:

- изделия набора согласно таблице 1;
- этикетка;
- инструкция по применению (1 шт. в коробку).

Для реализации части назначения допускается поставка набора в меньшей комплектации, но не менее двух изделий в наборе. Количество изделий, входящих в состав набора, указано в таблице 1. Набор допускается доукомплектовывать единичными изделиями в индивидуальной непрозрачной упаковке.

Инструкция по применению в зависимости от состава, назначения набора и квалификации пользователя может быть представлена в сокращённом виде или представлена в маркировке.

1.7 Упаковка

Внешняя упаковка для газовой стерилизации изготовлена из бумаги для упаковки и стерилизации медицинских изделий, марки ГС-60 по ТУ ОП 5434-193-00281022-2011 и полимерной пленки соответствующий требованиям ТР ТС 005/2011.

Набор допускается упаковать в пакет для газовой стерилизации по ТУ 9398-167-11764404-016 производства ООО "НПФ "ВИНАР", Россия, РУ № РЗН 2017/5956 или пакет «Клинипак» по ТУ 9398-001-69745848-2011 производства ООО "КЛИНИПАК", Россия, РУ № ФСР 2011/12874.

Допускается использовать внутреннюю упаковку из полотна нетканого марки СМС.

Упаковка набора является целостной.

Наборы в индивидуальной потребительской упаковке должны быть уложены в ящик из оффрокартона.

Масса брутто ящика не превышает 20 кг.

На ящик наклеивается упаковочный лист, включающий информацию:

- 1) наименование набора;
- 2) количество наборов;
- 3) код (номер) партии набора;
- 4) дата изготовления набора;
- 5) дата, до истечения которого набор может безопасно использоваться;
- 6) информация об условиях хранения набора;
- 7) информация о стерильности набора;
- 8) сведения о производителе, включая сокращенное наименование, почтовый адрес производителя, страна происхождения набора, телефон и адрес электронной почты.

1.8 Маркировка

Маркировка наносится на этикетке внутри упаковки. На этикетке указаны:

- 1) наименование медицинского изделия;
- 2) обозначение нормативных документов, обязательным требованиям которых должен соответствовать набор;
- 3) информация, необходимая для идентификации изделий, входящих в состав набора:
 - наименование изделий;
 - обозначение размеров изделий;
 - количество изделий в наборе;
 - а также допускается графическое изображение изделий и информация о назначении;
- 4) сведения о производителе, включая сокращенное наименование, почтовый адрес производителя, страна происхождения набора, телефон и адрес электронной почты;
- 5) код (номер) партии набора;
- 6) дата, до истечения которого набор может безопасно использоваться;
- 7) дата изготовления набора;
- 8) информация об условиях хранения набора;
- 9) информация о стерильности набора;
- 10) информация об одноразовом использовании медицинского изделия;
- 11) при необходимости на маркировке указывается инструкция по применению в сокращенном виде.

На этикетке, помещаемой внутри упаковки, допускается указать код (артикул) набора.

Маркировку допускается дополнить информацией в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрих-кодов.

2 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

К использованию набора допускается медицинский персонал изучивший настоящую инструкцию по применению.

Перед применением необходимо проверить целостность упаковки. В случае обнаружения нарушения упаковки (она не должна быть порванной, вскрытой, влажной внутри), необходимо утилизировать.

2.1 Порядок вскрытия стерильной упаковки

Для того, чтобы открыть внешнюю упаковку и извлечь составляющие необходимо обработать поверхность рук.

Порядок вскрытия стерильной упаковки:



1) Положить набор бумажной (белой) стороной вверх. Открывать упаковку двумя руками отрывая верхнюю часть

2) Вскрыть до конца наружный бумажный материал, не касаясь внутренней упаковки.

3) В стерильных перчатках, осторожно, не касаясь на наружную поверхность внешней упаковки, извлечь внутреннюю упаковку.



4) На столе распаковать внутреннюю упаковку и извлечь изделия.

2.2 Порядок подготовки

Во внутренней упаковке изделия сложены по порядку их применения: сверху вниз. Внизу находятся простыни, салфетки, по центру - инструменты и перевязочные материалы, наверху - предметы одежды.

Для исключения потери стерильности изделия необходимо применять по следующей последовательности:

В первую очередь необходимо надеть одежду. Одежда надевается тщательно, чтобы во время работы не поправлять части одежды, не спеша, соблюдая определенную последовательность: бахилы, маска, шапочка, халат хирургический, перчатки, фартук, нарукавники.

1) Для применения бахил необходимо достать из внутренней упаковки, развернуть и по очереди надеть на ноги.

2) Маску надевают в следующем порядке: сначала завязать верхние завязки на затылке, затем нижние, завязывая их по уровню выше. Растянуть маску вверх и вниз, чтобы полностью развернуть складки. Это позволит максимально закрыть лицо и уменьшить количество слоев, через которые вы будете дышать. Прижать носовой фиксатор к переносице для уменьшения утечки воздуха.

3) Уши и волосы следует полностью закрыть шапочкой, чтобы не допустить распространения волос и других частиц.

4) Одевание стерильного халата. Его можно надевать самостоятельно, обычно так поступает операционная сестра. Хирург одевается с помощью операционной сестры. Берут халат из упаковки, разворачивают его рукавами к себе, краями воротника закрывают кисти рук, хирург одевает руки в рукава халата, не касаясь своими кистями стерильного халата медицинской сестры, опуская руки вниз; надев халат на руки, поднимает их кверху, медицинская сестра подходит к хирургу сзади и завязывает завязки халата, хирург завязывает завязки на рукавах, затем подает санитарке пояс: она берет его за кончики и завязывает петлей, запахивая полы халата.

5) Надевание перчаток: проверить на целостность, пальцами правой руки отгибать ладонный край манжеты левой перчатки и вводить левую руку в перчатку, натягивая ее на халат, пальцами левой руки в перчатке отгибают манжету ладонного края перчатки и вводят правую руку в перчатку; манжету натягивают на халат.

6) Затем надевают фартук: в петлю аккуратно продевают голову, сзади фиксируют фартук завязками.

7) Нарукавники надеваются поверх перчаток и халата, обеспечивая дополнительную защиту хирурга при проведении операции.

Далее применяются чехлы:

8) Чехол на аппаратуру тип А используется для покрытия манипуляторов оборудования, аппаратур, чехол на аппаратуру тип В используется для покрытия трубок, шлангов, кабелей, чехол на аппаратуру тип С используется для одевания на ручку операционной лампы. Чехлы выступают в роли физического барьера для предотвращения заряжения между оборудованием, его принадлежностями и операционным полем во время проведения хирургической процедуры;

9) Чехол на инструментальный столик используется в качестве защитного покрытия инструментального столика и обеспечивает барьер с целью предотвратить взаимное загрязнение в различных клинических условиях. Чехол сложен телескопически. Порядок надевания: надо завести пальцы за отворот чехла на который нанесена маркировка, надеть сложенный чехол на столик и развести руки вперед;

Далее необходимо извлечь инструмент, приспособления, перевязочные материалы и поместить на инструментальный столик.

10) Пинцет полимерный используются для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов, во время хирургических процедур;

11) Скальпель хирургический - ручной хирургический инструмент, конструктивно состоящий из ручки, переходящей в лезвие (несъемное), используемый врачом для разрезания или иссечения тканей пациента;

12) Зажим окончательный для захвата или сжатия тампонов, салфеток, удержания мягких тканей и биологических отходов во время хирургических процедур;

13) Шприц с иглой инъекционной используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений;

14) Игла инъекционная применяется вместе со шприцами, инфузионными и трансфузионными системами для введения лекарственных средств, забора и переливания крови;

15) Лоток полимерный используется для проведения различных медицинских манипуляций: промывания дренажных трубок; катетеризаций; пункций; перевязок; и т.д., для сбора перевязочного материала, инструмента, посуды, отходов в медицинских учреждениях.

16) Тампон используется во время хирургических операции для поглощения жидкостей и/или остановки кровотечения;

17) Салфетка используется для впитывания посторонних жидкостей во время хирургических процедур;

18) Полотенце используется для очищения поверхности рук, одежды от излишней жидкости во время хирургической процедуры;

19) Повязка используется для наружного применения при различных хирургических вмешательствах, для сближения краев ран, для фиксирования повязок, предметов на поверхности кожи;

20) Пластырь используется для надежной фиксации внутривенных катетеров, канюль, других медицинских устройств на теле;

21) Бинт фиксирующий с неосыпающимися краями используется для фиксирования и поддержания суставов и мягких тканей в покое после операций и хирургических процедур;

22) Бинт марлевый используются в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента.

23) Мешок используется для сбора излишних жидкостей во время хирургических процедур.

Далее необходимо извлечь подстилку, простыни и постелить/разместить на или под пациента.

24) Подстилка (пеленка) используется для помещения под пациента для впитывания жидкостей организма, выделяющихся в ходе хирургических процедур;

25) Простыня универсальная используется для обеспечения чистого стерильного поля вокруг раны или операционного поля для малоинвазивных и кратковременных хирургических процедур. Простыня крепится на теле пациента с помощью липких элементов;

26) Простыня с вырезом используется для обеспечения чистого стерильного поля вокруг раны в различных клинических условиях. Изделие крепится непосредственно на коже с помощью липких элементов;

27) Простыня хирургическая тип А используется на пациентах во время проведения хирургических процедур для изоляции места хирургического разреза или операционного поля (в основном на брюшной полости) от загрязнения, имеет специально предназначенную для этих целей форму и узлы, которые предотвращают миграцию бактерий с кожи больного, обеспечивают стерильную поверхность в течение всей операции, простыня хирургическая тип В используется на пациентах в процедурах пластической хирургии и во время проведения офтальмологических операций;

28) Бахила операционная используется для одевания на ногу пациента для уменьшения риска распространения инфекций.

Далее используются изделия с липкой поверхностью:

29) Операционная пленка накладывается на операционное поле, через которое проводится разрез кожи, она обеспечивает стерильную поверхность в течение всей операции, предотвращает миграцию бактерий с поверхности кожи пациента;

30) Фиксатор предметов используется для удержания и фиксации одного или нескольких проводов, кабелей и трубок внутри стерильного поля во время проведения хирургической процедуры. С помощью липкой поверхности можно зафиксировать на хирургических простынях;

31) Карман-приемник используется для крепления с помощью липкой поверхности на поверхность хирургической простыни или под операционным полем и предназначен для использования в качестве емкости для экссудата, крови, других биологических отходов.

При обнаружении неисправности изделия, входящего в набор, утилизировать согласно правилам утилизации.

Неисправности изделий: разрезы, разрывы материалов, механические дефекты; расхождение швов; потеря герметичности пленочных материалов.

Одежду снимают в специально выделенном для этого чистом помещении. Последовательность снятия после применения: перед снятием руки в перчатках погружают в дезинфицирующий раствор на 1 – 2 минуты. Развязывают пояса фартука, снимают фартук, развязывают пояс ворота халата и, опустив верхний край перчаток, скрещенными руками за плечи снимают халат вместе с нарукавниками, одновременно выворачивая его, заворачивая наружную его часть внутрь, снимают шапочку, выворачивая двумя руками наружной поверхностью вовнутрь, развязывают завязки маски и снимают ее не касаясь внутренней поверхности. Снимают бахилы, снимают перчатки, выворачивая и проверяя их на целостность, затем обеззараживают руки дезинфекционным раствором.

Изделия после использования необходимо собрать в пакет полиэтиленовый для сбора и хранения медицинских отходов, после чего утилизировать по правилам раздела 5 настоящей инструкции.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

К эксплуатации изделий набора допускаются лица, знающие правила их эксплуатации.

Противопоказание – не применять набор не по назначению, не использовать поврежденные изделия набора (Неисправности: разрезы, разрывы материалов, механические дефекты; расхождение швов; потеря герметичности пленочных материалов). При обнаружении неисправности изделия, входящего в набор, утилизировать согласно правилам утилизации. Не применять в случае обнаружения нарушения упаковки набора (она не должна быть порванной, вскрытой, мокрой внутри). Случайно вскрытые стерильные наборы, упавшие или поврежденные изделия набора использовать запрещается. При несоблюдении порядка вскрытия упаковки и нарушении порядка применения набора есть вероятность потери стерильности изделий, входящих в состав набора.

Возможные побочные эффекты – индивидуальная непереносимость материалов может проявляться в виде побочных действий: аллергические реакции организма.

4 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Набор в упаковке изготовителя следует хранить на складах. Коробки должны укладываться в устойчивые штабеля. Высота штабеля не должна быть более 2,0 м. Наборы в рваной и неисправной коробке укладывать в штабеля запрещается.

Хранение должно осуществляться в помещениях без сквозняков с источниками дневного или искусственного света. Само место хранения должно быть удалено от источника тепла как минимум на 1 метр. Избегать попадания прямых ультрафиолетовых лучей.

Воздух помещения для хранения наборов не должен содержать пары кислот и щелочей.

Набора в упаковке производителя должны храниться при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°C

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия набора после использования их по назначению подлежат утилизации.

Повторно использовать запрещается.

Сбор, обеззараживание, временное хранение, транспортирование, уничтожение и утилизацию использованных изделий набора осуществляют в соответствии СанПиН 2.1.3684 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Дезинфекция набора после его использования возможна автоклавированием, камерным и химическими методами. Протезированный набор подлежит обычной утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с Сан-ПиН 2.1.3684 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

Для утилизации необходимо использовать пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора и хранения медицинских отходов класса Б по следующим правилам:

- 1) Достаньте и расправьте пакет и раскройте его по горловине.
- 2) Руками придайте ему округлую форму.
- 3) Вставьте его в подходящую по размеру тару.
- 4) Для фиксации пакета загните его края по краю тары.
- 5) Проверьте, касается ли дно пакета дна тары.
- 6) Заполните пакет на 3/4 отходами. Следите за тем, чтобы в пакет не попал острый инструментальный.
- 7) Соберите края пакета и выпустите из него воздух.
- 8) Перекрутите горловину пакета.
- 9) Герметизируйте пакет при помощи стяжки, обогнув перекрученную горловину пакета стяжкой и просунув гладкий хвостик стяжки в отверстие на другом ее конце.

Меры предосторожности при утилизации

Колющие и режущие изделия запрещается собирать в пакеты для хранения отходов. Необходимо использовать контейнер для сбора острого инструментария.

В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и/или слизистых), необходимо принять меры экстренной профилактики.

Изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу А по СанПиН 2.1.3684 и утилизируются как бытовые отходы.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие наборов требованиям ТУ 32.50.50-002-05511159-2019 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок сохранения стерильности – 4 года.

7 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Комплекты соответствуют ТУ 32.50.50-002-05511159-2019 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК _____

Дата изготовления _____

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке с этикеткой предъявляются по адресу производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Мединновация» (ООО «Мединновация») адрес: 422545, республика Татарстан, Зеленодольский район, город Зеленодольск, улица Баки Урманче, дом 12, кв. 54, e-mail: medinnovac@bk.ru

9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНИМАЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ EN 13795-2-2011 Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования.

МУ 287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения

ГОСТ ISO 11737-2-2011 Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации

СанПиН 2.1.3684 -21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий"

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными

ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.

ГОСТ ISO 10993-7-2016 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации.

ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ГОСТ ISO 10993-11-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.

ГОСТ ISO 10993-12-2015 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы.

ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний."

ГОСТ 31214-2016 "Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность."


10. Символы на потребительской и транспортной таре



Одноразовое
использование



Не использовать при
повреждении упаковки

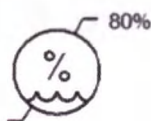


Диапазон влажности



Не допускать
воздействия
солнечного света



Беречь от влаги

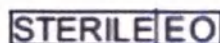

Стерилизация оксидом
этилена



Температурный диапазон




Хрупкое, обращаться
осторожно



Верх

Инструкция по применению может предоставляться потребителю в сокращенном виде на вариант исполнения изделий набора. Полное наименование и все варианты исполнения изделий набора представлены в регистрационном удостоверении.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Габаритные и основные размеры

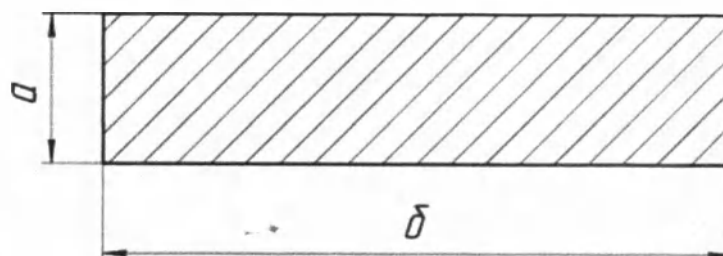

Верхний слой – полотно, нижний слой – липкий слой

Рисунок А.1 – Повязка (Варианты исполнения по размерам в таблице А.1)

Таблица А.1

Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см
PM 001	6	6	PM 026	7	35	PM 051	10	40	PM 076	16	18
PM 002	6	7	PM 027	7	40	PM 052	10	45	PM 077	16	20
PM 003	6	8	PM 028	8	8	PM 053	10	50	PM 078	16	25
PM 004	6	9	PM 029	8	9	PM 054	12	12	PM 079	16	30
PM 005	6	10	PM 030	8	10	PM 055	12	14	PM 080	16	35
PM 006	6	12	PM 031	8	12	PM 056	12	16	PM 081	16	40
PM 007	6	14	PM 032	8	14	PM 057	12	18	PM 082	16	45
PM 008	6	16	PM 033	8	15	PM 058	12	20	PM 083	16	50
PM 009	6	18	PM 034	8	17	PM 059	12	25	PM 084	18	18
PM 010	6	20	PM 035	8	20	PM 060	12	30	PM 085	18	20
PM 011	6	25	PM 036	8	25	PM 061	12	35	PM 086	18	25
PM 012	6	30	PM 037	8	30	PM 062	12	40	PM 087	18	30
PM 013	6	35	PM 038	8	35	PM 063	12	45	PM 088	18	35
PM 014	6	40	PM 039	8	40	PM 064	12	50	PM 089	18	40
PM 015	7	7	PM 040	8	45	PM 065	14	14	PM 090	18	45
PM 016	7	8	PM 041	8	50	PM 066	14	16	PM 091	18	50
PM 017	7	9	PM 042	10	10	PM 067	14	18	PM 092	25	12
PM 018	7	10	PM 043	10	12	PM 068	14	20	PM 093	20	25
PM 019	7	12	PM 044	10	14	PM 069	14	25	PM 094	20	30
PM 020	7	14	PM 045	10	16	PM 070	14	30	PM 095	20	35
PM 021	7	16	PM 046	10	18	PM 071	14	35	PM 096	20	40
PM 022	7	18	PM 047	10	20	PM 072	14	40	PM 097	20	45
PM 023	7	20	PM 048	10	25	PM 073	14	45	PM 098	20	50
PM 024	7	25	PM 049	10	30	PM 074	14	50	PM 099	20	55
PM 025	7	30	PM 050	10	35	PM 075	16	16	PM 100	20	60

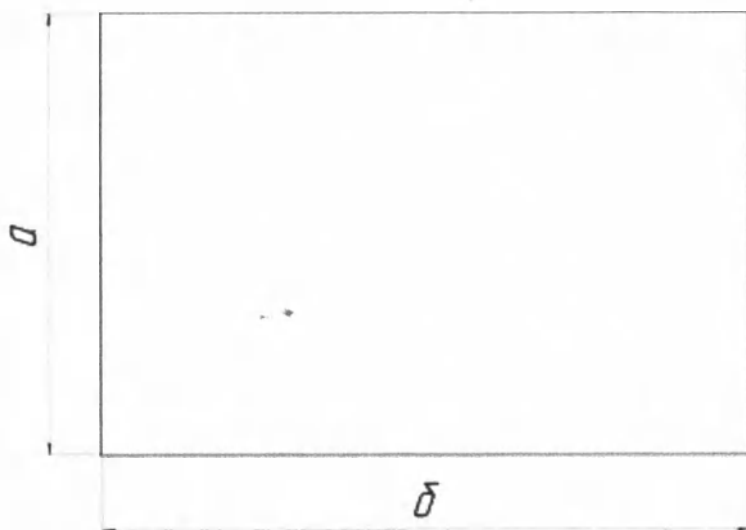


Рисунок А.2 – Полотенце (Варианты исполнения по размерам в таблице А.2)

Таблица А.2

Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см
SM 001	40	40	SM 019	50	55	SM 037	60	100	SM 055	75	110
SM 002	40	45	SM 020	50	60	SM 038	65	65	SM 056	75	120
SM 003	40	50	SM 021	50	65	SM 039	65	70	SM 057	80	80
SM 004	40	55	SM 022	50	70	SM 040	65	75	SM 058	80	90
SM 005	40	60	SM 023	50	75	SM 041	65	80	SM 059	80	100
SM 006	40	65	SM 024	50	80	SM 042	65	90	SM 060	80	110
SM 007	40	70	SM 025	55	55	SM 043	65	100	SM 061	80	120
SM 008	40	75	SM 026	55	60	SM 044	70	70	SM 062	90	90
SM 009	40	80	SM 027	55	65	SM 045	70	75	SM 063	90	100
SM 010	45	45	SM 028	55	70	SM 046	70	80	SM 064	90	110
SM 011	45	50	SM 029	55	75	SM 047	70	90	SM 065	90	120
SM 012	45	55	SM 030	55	80	SM 048	70	100	SM 066	100	100
SM 013	45	60	SM 031	60	60	SM 049	70	110	SM 067	100	110
SM 014	45	65	SM 032	60	65	SM 050	70	120	SM 068	100	120
SM 015	45	70	SM 033	60	70	SM 051	75	75	SM 069	120	140
SM 016	45	75	SM 034	60	75	SM 052	75	80	SM 070	120	150
SM 017	45	80	SM 035	60	80	SM 053	75	90	SM 071	120	160
SM 018	50	50	SM 036	60	90	SM 054	75	100			

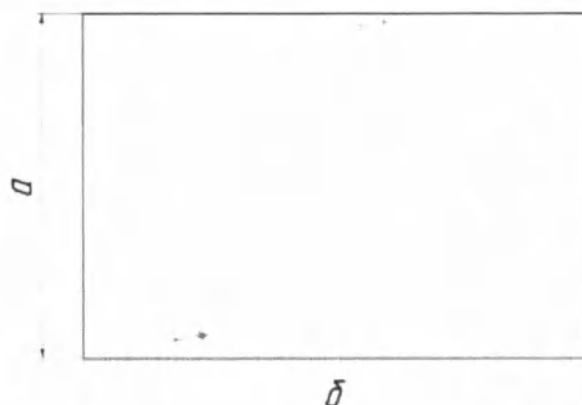


Рисунок А.3 – Салфетка (Варианты исполнения по размерам в таблице А.3)

Таблица А.3


Обозначение	а, см	б, см
SS 001	5	5
SS 002	5	7
SS 003	5	10
SS 004	7	7
SS 005	7	10
SS 006	7	12
SS 007	10	10
SS 008	10	15
SS 009	10	20
SS 010	10	25
SS 011	10	30
SS 012	10	35
SS 013	10	40
SS 014	15	15
SS 015	15	20
SS 016	15	25
SS 017	15	30

Обозначение	а, см	б, см
SS 018	15	35
SS 019	15	40
SS 020	20	20
SS 021	20	25
SS 022	20	30
SS 023	20	35
SS 024	20	40
SS 025	25	25
SS 026	25	30
SS 027	25	35
SS 028	25	40
SS 029	30	30
SS 030	30	35
SS 031	30	40
SS 032	30	45
SS 033	30	50
SS 034	30	55

Обозначение	а, см	б, см
SS 035	30	60
SS 036	35	35
SS 037	35	40
SS 038	35	45
SS 039	35	50
SS 040	35	55
SS 041	35	60
SS 042	40	40
SS 043	40	45
SS 044	40	50
SS 045	40	55
SS 046	40	60
SS 047	40	65
SS 048	40	70
SS 049	40	75
SS 050	40	80
SS 051	45	45

Обозначение	а, см	б, см
SS 052	45	50
SS 053	45	55
SS 054	45	60
SS 055	45	65
SS 056	45	70
SS 057	45	75
SS 058	45	80
SS 059	50	50
SS 060	50	55
SS 061	50	60
SS 062	50	65
SS 063	50	70
SS 064	50	75
SS 065	50	80

Исполнение 1

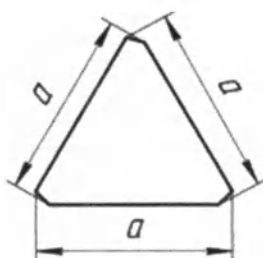

Исполнение 2

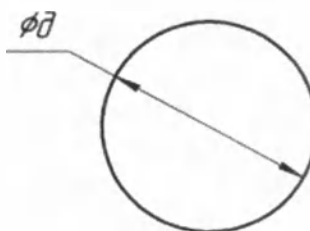


Рисунок А.4 – Тампон (Варианты исполнения: 1 или 2, исполнения по размерам в таблице А.4)

Таблица А.4

Обозначение	а, см	д, см
ТТ 001	3	-
ТТ 002	4	-
ТТ 003	5	-
ТТ 004	6	-
ТТ 005	8	-

Обозначение	а, см	д, см
ТК 001	-	2
ТК 002	-	3
ТК 003	-	4
ТК 004	-	5
ТК 005	-	6

Обозначение	а, см	д, см
ТК 009	-	8

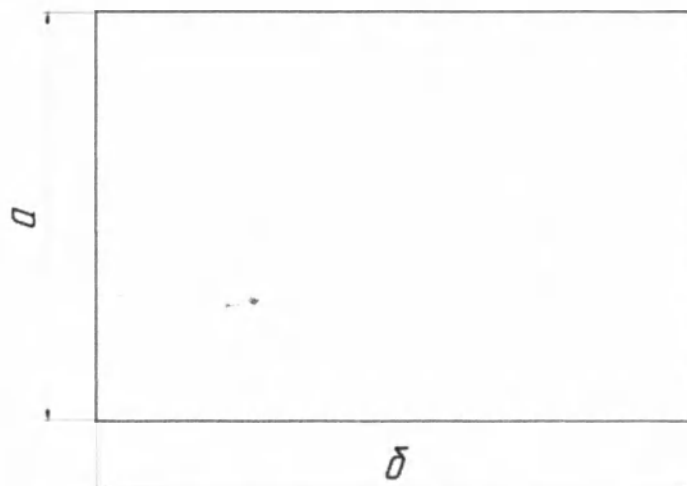


Рисунок А.5 – Подстилка (Варианты исполнения по размерам в таблице А.5)

Таблица А.5

Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см
PP 001	40	40	PP 024	50	80	PP 047	70	90	PP 070	90	140
PP 002	40	45	PP 025	55	55	PP 048	70	100	PP 071	90	150
PP 003	40	50	PP 026	55	60	PP 049	70	110	PP 072	90	160
PP 004	40	55	PP 027	55	65	PP 050	70	120	PP 073	90	180
PP 005	40	60	PP 028	55	70	PP 051	75	75	PP 074	100	100
PP 006	40	65	PP 029	55	75	PP 052	75	80	PP 075	100	110
PP 007	40	70	PP 030	55	80	PP 053	75	90	PP 076	100	120
PP 008	40	75	PP 031	60	60	PP 054	75	100	PP 077	100	140
PP 009	40	80	PP 032	60	65	PP 055	75	110	PP 078	100	150
PP 010	45	45	PP 033	60	70	PP 056	75	120	PP 079	100	160
PP 011	45	50	PP 034	60	75	PP 057	80	80	PP 080	100	180
PP 012	45	55	PP 035	60	80	PP 058	80	90	PP 081	110	110
PP 013	45	60	PP 036	60	90	PP 059	80	100	PP 082	110	120
PP 014	45	65	PP 037	60	100	PP 060	80	110	PP 083	110	140
PP 015	45	70	PP 038	65	65	PP 061	80	120	PP 084	110	150
PP 016	45	75	PP 039	65	70	PP 062	80	140	PP 085	110	160
PP 017	45	80	PP 040	65	75	PP 063	80	150	PP 086	110	180
PP 018	50	50	PP 041	65	80	PP 064	80	160	PP 087	120	140
PP 019	50	55	PP 042	65	90	PP 065	80	180	PP 088	120	150
PP 020	50	60	PP 043	65	100	PP 066	90	90	PP 089	120	160
PP 021	50	65	PP 044	70	70	PP 067	90	100	PP 090	120	180
PP 022	50	70	PP 045	70	75	PP 068	90	110			
PP 023	50	75	PP 046	70	80	PP 069	90	120			



Рисунок А.6 – **Простыня хирургическая, тип А** (Варианты исполнения: с/без полотна на дугу, с/без липкого края на дугу, с/без фиксатора предметов, с/без встроенных бахил, с/без боковых вставок, с/без кармана, с/без отвода, с/без впитывающей зоны, с/без липкого края, с/без операционной пленки, отверстие по исполнению 1 или 2, исполнения по габаритным размерам в таблице А.6, исполнения по размерам отверстия в таблице А.7)

100

Обозна чение	а, см	б, см
РА 019	130	170
РА 020	130	180
РА 021	130	190
РА 022	130	200
РА 023	130	210
РА 024	130	220
РА 025	130	230
РА 026	130	240
РА 027	130	250
РА 028	130	260
РА 029	130	270
РА 030	130	280
РА 031	130	290
РА 032	130	300
РА 033	140	160
РА 034	140	170
РА 035	140	180
РА 036	140	190
РА 037	140	200
РА 038	140	210
РА 039	140	220
РА 040	140	230
РА 041	140	240
РА 042	140	250
РА 043	140	260
РА 044	140	270
РА 045	140	280
РА 046	140	290
РА 047	140	300
РА 048	140	310
РА 049	140	320
РА 050	150	170
РА 051	150	180
РА 052	150	190
РА 053	150	200
РА 054	150	210
РА 055	150	220
РА 056	150	230
РА 057	150	240
РА 058	150	250
РА 059	150	260
РА 060	150	270
РА 061	150	280
РА 062	150	290
РА 063	150	300
РА 064	150	310
РА 065	150	320
РА 066	150	330
РА 067	160	180
РА 068	160	190
РА 069	160	200
РА 070	160	210
РА 071	160	220
РА 072	160	230
РА 073	160	240
РА 074	160	250
РА 075	160	260

Обозна чение	а, см	б, см
РА 094	170	290
РА 095	170	300
РА 096	170	310
РА 097	170	320
РА 098	170	330
РА 099	170	340
РА 100	170	350
РА 101	180	200
РА 102	180	210
РА 103	180	220
РА 104	180	230
РА 105	180	240
РА 106	180	250
РА 107	180	260
РА 108	180	270
РА 109	180	280
РА 110	180	290
РА 111	180	300
РА 112	180	310
РА 113	180	320
РА 114	180	330
РА 115	180	340
РА 116	180	350
РА 117	190	200
РА 118	190	210
РА 119	190	220
РА 120	190	230
РА 121	190	240
РА 122	190	250
РА 123	190	260
РА 124	190	270
РА 125	190	280
РА 126	190	290
РА 127	190	300
РА 128	190	310
РА 129	190	320
РА 130	190	330
РА 131	190	340
РА 132	190	350
РА 133	200	200
РА 134	200	210
РА 135	200	220
РА 136	200	230
РА 137	200	240
РА 138	200	250
РА 139	200	260
РА 140	200	270
РА 141	200	280
РА 142	200	290
РА 143	200	300
РА 144	200	310
РА 145	200	320
РА 146	200	330
РА 147	200	340
РА 148	200	350
РА 149	210	210
РА 150	210	220

Обозна чение	а, см	б, см
РА 169	220	270
РА 170	220	280
РА 171	220	290
РА 172	220	300
РА 173	220	310
РА 174	220	320
РА 175	220	330
РА 176	220	340
РА 177	220	350
РА 178	230	230
РА 179	230	240
РА 180	230	250
РА 181	230	260
РА 182	230	270
РА 183	230	280
РА 184	230	290
РА 185	230	300
РА 186	230	310
РА 187	230	320
РА 188	230	330
РА 189	230	340
РА 190	230	350
РА 191	240	240
РА 192	240	250
РА 193	240	260
РА 194	240	270
РА 195	240	280
РА 196	240	290
РА 197	240	300
РА 198	240	310
РА 199	240	320
РА 200	240	330
РА 201	240	340
РА 202	240	350
РА 203	250	250
РА 204	250	260
РА 205	250	270
РА 206	250	280
РА 207	250	290
РА 208	250	300
РА 209	250	310
РА 210	250	320
РА 211	250	330
РА 212	250	340
РА 213	250	350
РА 214	250	360
РА 215	250	370
РА 216	250	380
РА 217	250	390
РА 218	250	400
РА 219	250	250
РА 220	250	260
РА 221	250	270
РА 222	250	280
РА 223	250	290
РА 224	250	300
РА 225	250	310

Обозна чение	а, см	б, см
РА 244	260	350
РА 245	260	360
РА 246	260	370
РА 247	260	380
РА 248	260	390
РА 249	260	400
РА 250	270	270
РА 251	270	280
РА 252	270	290
РА 253	270	300
РА 254	270	310
РА 255	270	320
РА 256	270	330
РА 257	270	340
РА 258	270	350
РА 259	270	360
РА 260	270	370
РА 261	270	380
РА 262	270	390
РА 263	270	400
РА 264	280	280
РА 265	280	290
РА 266	280	300
РА 267	280	310
РА 268	280	320
РА 269	280	330
РА 270	280	340
РА 271	280	350
РА 272	280	360
РА 273	280	370
РА 274	280	380
РА 275	280	390
РА 276	280	400
РА 277	290	290
РА 278	290	300
РА 279	290	310
РА 280	290	320
РА 281	290	330
РА 282	290	340
РА 283	300	300
РА 284	300	310
РА 285	300	320
РА 286	300	330
РА 287	300	340
РА 288	300	350
РА 289	310	300
РА 290	310	310
РА 291	310	320
РА 292	310	330
РА 293	310	340
РА 294	310	350
РА 295	320	300
РА 296	320	310
РА 297	320	320
РА 298	320	330
РА 299	320	340
РА 300	320	350

Таблица А.7

Обозна- чение	в, см	г, см	д, см
ОА 001	4	5	-
ОА 002	4	6	-
ОА 003	4	7	-
ОА 004	4	8	-
ОА 005	4	9	-
ОА 006	4	10	-
ОА 007	4	10	-
ОА 008	4	12	-
ОА 009	4	14	-
ОА 010	4	15	-
ОА 011	5	5	-
ОА 012	5	6	-
ОА 013	5	7	-
ОА 014	5	8	-
ОА 015	5	9	-
ОА 016	5	10	-
ОА 017	5	10	-
ОА 018	5	12	-
ОА 019	5	14	-
ОА 020	5	15	-
ОА 021	5	16	-
ОА 022	5	18	-
ОА 023	5	20	-
ОА 024	6	6	-
ОА 025	6	7	-
ОА 026	6	8	-
ОА 027	6	9	-
ОА 028	6	10	-
ОА 029	6	10	-
ОА 030	6	12	-
ОА 031	6	14	-
ОА 032	6	15	-
ОА 033	6	16	-
ОА 034	6	18	-
ОА 035	6	20	-
ОА 036	7	7	-
ОА 037	7	8	-
ОА 038	7	9	-
ОА 039	7	10	-
ОА 040	7	10	-
ОА 041	7	12	-
ОА 042	7	14	-
ОА 043	7	15	-
ОА 044	7	16	-
ОА 045	7	18	-
ОА 046	7	20	-
ОА 047	8	8	-
ОА 048	8	9	-
ОА 049	8	10	-
ОА 050	8	10	-
ОА 051	8	12	-
ОА 052	8	14	-
ОА 053	8	15	-
ОА 054	8	16	-
ОА 055	8	18	-
ОА 056	8	20	-
ОА 057	9	9	-
ОА 058	9	10	-

Обозна- чение	в, см	г, см	д, см
ОА 085	12	16	-
ОА 086	12	18	-
ОА 087	12	20	-
ОА 088	12	22	-
ОА 089	12	24	-
ОА 090	12	25	-
ОА 091	12	27	-
ОА 092	12	30	-
ОА 093	12	32	-
ОА 094	12	33	-
ОА 095	12	35	-
ОА 096	14	14	-
ОА 097	14	15	-
ОА 098	14	16	-
ОА 099	14	18	-
ОА 100	14	20	-
ОА 101	14	22	-
ОА 102	14	24	-
ОА 103	14	25	-
ОА 104	14	27	-
ОА 105	14	30	-
ОА 106	14	32	-
ОА 107	14	33	-
ОА 108	14	35	-
ОА 109	15	15	-
ОА 110	15	16	-
ОА 111	15	18	-
ОА 112	15	20	-
ОА 113	15	22	-
ОА 114	15	24	-
ОА 115	15	25	-
ОА 116	15	27	-
ОА 117	15	30	-
ОА 118	15	32	-
ОА 119	15	33	-
ОА 120	15	35	-
ОА 121	15	37	-
ОА 122	15	40	-
ОА 123	16	16	-
ОА 124	16	18	-
ОА 125	16	20	-
ОА 126	16	22	-
ОА 127	16	24	-
ОА 128	16	25	-
ОА 129	16	27	-
ОА 130	16	30	-
ОА 131	16	32	-
ОА 132	16	33	-
ОА 133	16	35	-
ОА 134	16	37	-
ОА 135	16	40	-
ОА 136	18	18	-
ОА 137	18	20	-
ОА 138	18	22	-
ОА 139	18	24	-
ОА 140	18	25	-
ОА 141	18	27	-
ОА 142	18	30	-

Обозна- чение	в, см	г, см	д, см
ОА 169	24	24	-
ОА 170	24	25	-
ОА 171	24	27	-
ОА 172	24	30	-
ОА 173	24	32	-
ОА 174	24	33	-
ОА 175	24	35	-
ОА 176	24	37	-
ОА 177	24	40	-
ОА 178	24	45	-
ОА 179	24	50	-
ОА 180	25	25	-
ОА 181	25	27	-
ОА 182	25	30	-
ОА 183	25	32	-
ОА 184	25	33	-
ОА 185	25	35	-
ОА 186	25	37	-
ОА 187	25	40	-
ОА 188	25	45	-
ОА 189	25	50	-
ОА 190	27	27	-
ОА 191	27	30	-
ОА 192	27	32	-
ОА 193	27	33	-
ОА 194	27	35	-
ОА 195	27	37	-
ОА 196	27	40	-
ОА 197	27	45	-
ОА 198	27	50	-
ОА 199	30	30	-
ОА 200	30	32	-
ОА 201	30	33	-
ОА 202	30	35	-
ОА 203	30	37	-
ОА 204	30	40	-
ОА 205	30	45	-
ОА 206	30	50	-
ОА 207	30	55	-
ОА 208	30	60	-
ОА 209	30	65	-
ОА 210	30	70	-
ОА 211	32	32	-
ОА 212	32	33	-
ОА 213	32	35	-
ОА 214	32	37	-
ОА 215	32	40	-
ОА 216	32	45	-
ОА 217	32	50	-
ОА 218	32	55	-
ОА 219	32	60	-
ОА 220	32	65	-
ОА 221	32	70	-
ОА 222	32	75	-
ОА 223	32	80	-
ОА 224	32	85	-
ОА 225	32	90	-
ОА 226	32	95	-


Обозна- чение	в, см	г, см	д, см
ОА 253	35	50	-
ОА 254	35	55	-
ОА 255	35	60	-
ОА 256	35	65	-
ОА 257	35	70	-
ОА 258	35	75	-
ОА 259	35	80	-
ОА 260	35	85	-
ОА 261	35	90	-
ОА 262	35	95	-
ОА 263	35	100	-
ОА 264	37	37	-
ОА 265	37	40	-
ОА 266	37	45	-
ОА 267	37	50	-
ОА 268	37	55	-
ОА 269	37	60	-
ОА 270	37	65	-
ОА 271	37	70	-
ОА 272	37	75	-
ОА 273	37	80	-
ОА 274	40	40	-
ОА 275	40	45	-
ОА 276	40	50	-
ОА 277	40	55	-
ОА 278	40	60	-
ОА 279	40	65	-
ОА 280	40	70	-
ОА 281	40	75	-
ОА 282	40	80	-
ОА 283	45	45	-
ОА 284	45	50	-
ОА 285	45	55	-
ОА 286	45	60	-
ОА 287	45	65	-
ОА 288	45	70	-
ОА 289	45	75	-
ОА 290	45	80	-
ОА 291	45	85	-
ОА 292	45	90	-
ОА 293	45	95	-
ОА 294	45	100	-
ОА 295	50	50	-
ОА 296	50	55	-
ОА 297	50	60	-
ОА 298	50	65	-
ОА 299	50	70	-
ОА 300	50	75	-
ОА 301	50	80	-
ОА 302	50	85	-
ОА 303	50	90	-
ОА 304	50	95	-
ОА 305	50	100	-
ОА 306	-	-	4
ОА 307	-	-	5
ОА 308	-	-	6
ОА 309	-	-	7
ОА 310	-	-	8

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OA 059	9	11	-
OA 060	9	12	-
OA 061	9	14	-
OA 062	9	15	-
OA 063	9	16	-
OA 064	9	18	-
OA 065	9	20	-
OA 066	9	22	-
OA 067	9	24	-
OA 068	9	25	-
OA 069	10	10	-
OA 070	10	11	-
OA 071	10	12	-
OA 072	10	14	-
OA 073	10	15	-
OA 074	10	16	-
OA 075	10	18	-
OA 076	10	20	-
OA 077	10	22	-
OA 078	10	24	-
OA 079	10	25	-
OA 080	10	27	-
OA 081	10	30	-
OA 082	12	12	-
OA 083	12	14	-
OA 084	12	15	-

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OA 143	18	32	-
OA 144	18	33	-
OA 145	18	35	-
OA 146	18	37	-
OA 147	18	40	-
OA 148	20	20	-
OA 149	20	22	-
OA 150	20	24	-
OA 151	20	25	-
OA 152	20	27	-
OA 153	20	30	-
OA 154	20	32	-
OA 155	20	33	-
OA 156	20	35	-
OA 157	20	37	-
OA 158	20	40	-
OA 159	22	22	-
OA 160	22	24	-
OA 161	22	25	-
OA 162	22	27	-
OA 163	22	30	-
OA 164	22	32	-
OA 165	22	33	-
OA 166	22	35	-
OA 167	22	37	-
OA 168	22	40	-

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OA 227	32	100	-
OA 228	33	33	-
OA 229	33	35	-
OA 230	33	37	-
OA 231	33	40	-
OA 232	33	45	-
OA 233	33	50	-
OA 234	33	55	-
OA 235	33	60	-
OA 236	34	34	-
OA 237	34	35	-
OA 238	34	37	-
OA 239	34	40	-
OA 240	34	45	-
OA 241	34	50	-
OA 242	34	55	-
OA 243	34	60	-
OA 244	34	65	-
OA 245	34	70	-
OA 246	34	77	-
OA 247	34	80	-
OA 248	34	85	-
OA 249	35	35	-
OA 250	35	37	-
OA 251	35	40	-
OA 252	35	45	-

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OA 311	-	-	9
OA 312	-	-	10
OA 313	-	-	12
OA 314	-	-	14
OA 315	-	-	15
OA 316	-	-	16
OA 317	-	-	18
OA 318	-	-	20
OA 319	-	-	22
OA 320	-	-	24
OA 321	-	-	25
OA 322	-	-	27
OA 323	-	-	30
OA 324	-	-	32
OA 325	-	-	33
OA 326	-	-	35
OA 327	-	-	37
OA 328	-	-	40
OA 329	-	-	50

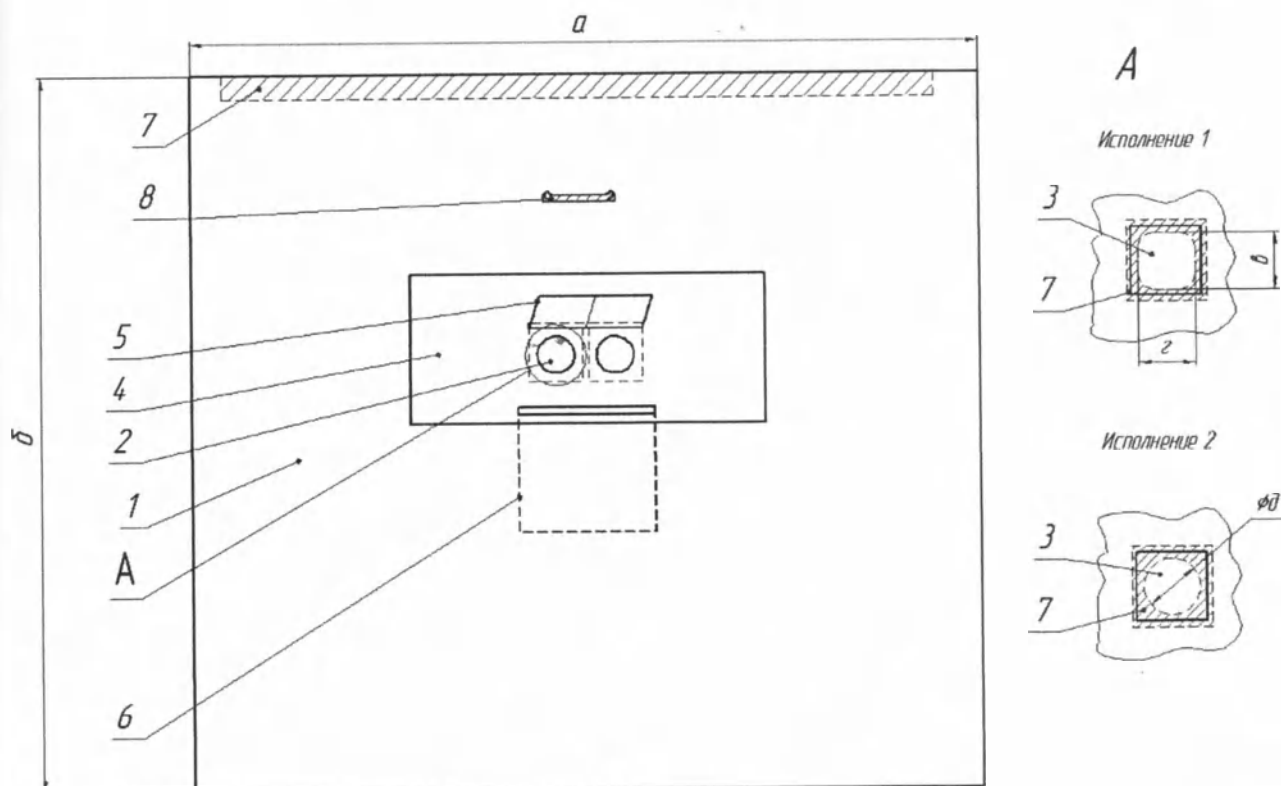

1-Полотно, 2-Отверстие, 3-Операционная пленка, 4-Впитывающая зона, 5-Шторка, 6-Карман, 7-Липкий край, 8-Фиксатор предметов

Рисунок А.7 – Простыня хирургическая, тип В (Варианты исполнения: с одним или с двумя отверстиями, с/без фиксатора предметов, с/без шторки, с/без кармана, с/без впитывающей зоны, с/без липкого края, с/без операционной пленки, отверстие по исполнению 1 или 2, исполнения по габаритным размерам в таблице А.8, исполнения по размерам отверстия в таблице А.9)

Таблица А.8

Обозначение	а, см	б, см
PB 001	15	20
PB 002	15	25
PB 003	15	30
PB 004	15	40
PB 005	20	30
PB 006	20	35
PB 007	20	40
PB 008	30	40
PB 009	30	50
PB 010	30	60
PB 011	40	50
PB 012	40	60
PB 013	50	50
PB 014	50	60
PB 015	50	70
PB 016	50	80
PB 017	50	90
PB 018	50	100
PB 019	50	110
PB 020	50	120
PB 021	60	60
PB 022	60	70
PB 023	60	80

Обозначение	а, см	б, см
PB 034	80	80
PB 035	80	90
PB 036	80	100
PB 037	80	110
PB 038	80	120
PB 039	80	130
PB 040	80	140
PB 041	80	150
PB 042	90	90
PB 043	90	100
PB 044	90	110
PB 045	90	120
PB 046	90	130
PB 047	90	140
PB 048	90	150
PB 049	90	160
PB 050	90	170
PB 051	90	180
PB 052	90	190
PB 053	90	200
PB 054	100	100
PB 055	100	110
PB 056	100	120

Обозначение	а, см	б, см
PB 067	110	130
PB 068	110	140
PB 069	110	150
PB 070	110	160
PB 071	110	170
PB 072	110	180
PB 073	110	190
PB 074	110	200
PB 075	120	120
PB 076	120	130
PB 077	120	140
PB 078	120	150
PB 079	120	160
PB 080	120	170
PB 081	120	180
PB 082	120	190
PB 083	120	200
PB 084	120	220
PB 085	120	250
PB 086	130	130
PB 087	130	140
PB 088	130	150
PB 089	130	160

Обозначение	а, см	б, см
PB 100	140	180
PB 101	140	190
PB 102	140	200
PB 103	140	220
PB 104	140	250
PB 105	150	150
PB 106	150	160
PB 107	150	170
PB 108	150	180
PB 109	150	190
PB 110	150	200
PB 111	150	220
PB 112	150	250
PB 113	160	160
PB 114	160	170
PB 115	160	180
PB 116	160	190
PB 117	160	200
PB 118	160	220
PB 119	160	250
PB 120	170	170
PB 121	170	180
PB 122	170	190

Обозна чение	а, см	б, см
PB 024	60	90
PB 025	60	100
PB 026	60	110
PB 027	60	120
PB 028	70	70
PB 029	70	80
PB 030	70	90
PB 031	70	100
PB 032	70	110
PB 033	70	120

Обозна чение	а, см	б, см
PB 057	100	130
PB 058	100	140
PB 059	100	150
PB 060	100	160
PB 061	100	170
PB 062	100	180
PB 063	100	190
PB 064	100	200
PB 065	110	110
PB 066	110	120

Обозна чение	а, см	б, см
PB 090	130	170
PB 091	130	180
PB 092	130	190
PB 093	130	200
PB 094	130	220
PB 095	130	250
PB 096	140	140
PB 097	140	150
PB 098	140	160
PB 099	140	170

Обозна чение	а, см	б, см
PB 123	170	200
PB 124	170	220
PB 125	170	250
PB 126	180	180
PB 127	180	190
PB 128	180	200
PB 129	180	220
PB 130	180	250


Таблица А.9

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OB 001	2	3	-
OB 002	2	4	-
OB 003	2	5	-
OB 004	2	5,5	-
OB 005	2	6	-
OB 006	2	7	-
OB 007	2	8	-
OB 008	2	9	-
OB 009	2	10	-
OB 010	3	3	-
OB 011	3	4	-
OB 012	3	5	-
OB 013	3	5,5	-
OB 014	3	6	-
OB 015	3	7	-
OB 016	3	8	-
OB 017	3	9	-
OB 018	3	10	-
OB 019	3,5	4	-
OB 020	3,5	5	-
OB 021	3,5	5,5	-
OB 022	3,5	6	-
OB 023	3,5	7	-
OB 024	3,5	8	-
OB 025	3,5	9	-
OB 026	3,5	10	-
OB 027	4	4	-
OB 028	4	5	-
OB 029	4	5,5	-
OB 030	4	6	-
OB 031	4	7	-
OB 032	4	8	-
OB 033	4	9	-
OB 034	4	10	-
OB 035	5	5	-
OB 036	5	5,5	-

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OB 037	5	6	-
OB 038	5	7	-
OB 039	5	8	-
OB 040	5	9	-
OB 041	5	10	-
OB 042	6	6	-
OB 043	6	7	-
OB 044	6	8	-
OB 045	6	9	-
OB 046	6	10	-
OB 047	6	11	-
OB 048	6	12	-
OB 049	6	13	-
OB 050	6	14	-
OB 051	6	15	-
OB 052	7	7	-
OB 053	7	8	-
OB 054	7	9	-
OB 055	7	10	-
OB 056	7	11	-
OB 057	7	12	-
OB 058	7	13	-
OB 059	7	14	-
OB 060	7	15	-
OB 061	8	8	-
OB 062	8	9	-
OB 063	8	10	-
OB 064	8	11	-
OB 065	8	12	-
OB 066	8	13	-
OB 067	8	14	-
OB 068	8	15	-
OB 069	9	9	-
OB 070	9	10	-
OB 071	9	11	-
OB 072	9	12	-

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OB 073	9	13	-
OB 074	9	14	-
OB 075	9	15	-
OB 076	10	10	-
OB 077	10	11	-
OB 078	10	12	-
OB 079	10	13	-
OB 080	10	14	-
OB 081	10	15	-
OB 082	10	17	-
OB 083	10	20	-
OB 084	10	22	-
OB 085	10	25	-
OB 086	11	11	-
OB 087	11	12	-
OB 088	11	13	-
OB 089	11	14	-
OB 090	11	15	-
OB 091	11	17	-
OB 092	11	20	-
OB 093	11	22	-
OB 094	11	25	-
OB 095	12	12	-
OB 096	12	13	-
OB 097	12	14	-
OB 098	12	15	-
OB 099	12	17	-
OB 100	12	20	-
OB 101	12	22	-
OB 102	12	25	-
OB 103	13	13	-
OB 104	13	14	-
OB 105	13	15	-
OB 106	13	17	-
OB 107	13	20	-
OB 108	13	22	-

Обозна чение	в, см	г, см	д, см
OB 109	13	25	-
OB 110	14	14	-
OB 111	14	15	-
OB 112	14	17	-
OB 113	14	20	-
OB 114	14	22	-
OB 115	14	25	-
OB 116	15	15	-
OB 117	15	17	-
OB 118	15	20	-
OB 119	15	22	-
OB 120	15	25	-
OB 121	-	-	2
OB 122	-	-	2,5
OB 123	-	-	3
OB 124	-	-	3,5
OB 125	-	-	4
OB 126	-	-	4,5
OB 127	-	-	5
OB 128	-	-	5,5
OB 129	-	-	6
OB 130	-	-	7
OB 131	-	-	8
OB 132	-	-	9
OB 133	-	-	10
OB 134	-	-	11
OB 135	-	-	12
OB 136	-	-	13
OB 137	-	-	14
OB 138	-	-	15
OB 139	-	-	16
OB 140	-	-	17
OB 141	-	-	18
OB 142	-	-	19
OB 143	-	-	20

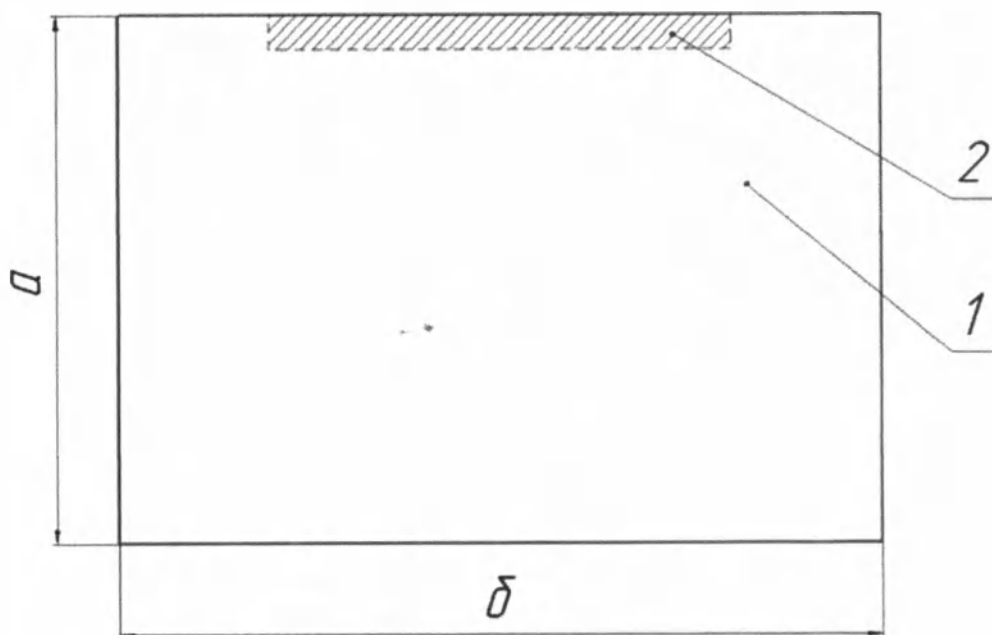

1-Полотно, 2-Липкий край

Рисунок А.8 – Простыня универсальная (Варианты исполнения: с/без липкого края, исполнения по размерам в таблице А.10)

Таблица А.10


Обозначение	а, см	б, см
PU 001	20	30
PU 002	20	40
PU 003	30	30
PU 004	30	40
PU 005	30	50
PU 006	40	40
PU 007	40	60
PU 008	40	80
PU 009	50	50
PU 010	50	60
PU 011	50	70
PU 012	50	80
PU 013	50	90
PU 014	50	100
PU 015	50	110
PU 016	50	120
PU 017	50	130
PU 018	50	140
PU 019	50	150
PU 020	60	60
PU 021	60	70
PU 022	60	80
PU 023	60	90
PU 024	60	100
PU 025	60	110
PU 026	60	120
PU 027	60	130
PU 028	60	140
PU 029	60	150
PU 030	70	70
PU 031	70	80
PU 032	70	90
PU 033	70	100

Обозначение	а, см	б, см
PU 062	80	180
PU 063	80	190
PU 064	80	200
PU 065	90	90
PU 066	90	100
PU 067	90	110
PU 068	90	120
PU 069	90	130
PU 070	90	140
PU 071	90	150
PU 072	90	160
PU 073	90	170
PU 074	90	180
PU 075	90	190
PU 076	90	200
PU 077	100	100
PU 078	100	110
PU 079	100	120
PU 080	100	130
PU 081	100	140
PU 082	100	150
PU 083	100	160
PU 084	100	170
PU 085	100	180
PU 086	100	190
PU 087	100	200
PU 088	100	210
PU 089	100	220
PU 090	100	230
PU 091	100	240
PU 092	100	250
PU 093	110	110
PU 094	110	120

Обозначение	а, см	б, см
PU 123	125	140
PU 124	125	150
PU 125	125	160
PU 126	125	170
PU 127	125	180
PU 128	125	190
PU 129	125	200
PU 130	130	130
PU 131	130	140
PU 132	130	150
PU 133	130	160
PU 134	130	170
PU 135	130	180
PU 136	130	190
PU 137	130	200
PU 138	130	210
PU 139	130	220
PU 140	130	230
PU 141	130	240
PU 142	130	250
PU 143	130	260
PU 144	140	140
PU 145	140	150
PU 146	140	160
PU 147	140	170
PU 148	140	180
PU 149	140	190
PU 150	140	200
PU 151	140	210
PU 152	140	220
PU 153	140	230
PU 154	140	240
PU 155	140	250

Обозначение	а, см	б, см
PU 184	160	230
PU 185	160	240
PU 186	160	250
PU 187	160	260
PU 188	160	270
PU 189	160	280
PU 190	160	290
PU 191	160	300
PU 192	170	170
PU 193	170	180
PU 194	170	190
PU 195	170	200
PU 196	170	210
PU 197	170	220
PU 198	170	230
PU 199	170	240
PU 200	170	250
PU 201	170	260
PU 202	170	270
PU 203	170	280
PU 204	170	290
PU 205	170	300
PU 206	180	180
PU 207	180	190
PU 208	180	200
PU 209	180	210
PU 210	180	220
PU 211	180	230
PU 212	180	240
PU 213	180	250
PU 214	180	260
PU 215	180	270
PU 216	180	280

Обозна чение	а, см	б, см	Обозна чение	а, см	б, см	Обозна чение	а, см	б, см	Обозна чение	а, см	б, см
PU 034	70	110	PU 095	110	130	PU 156	140	260	PU 217	180	290
PU 035	70	120	PU 096	110	140	PU 157	140	270	PU 218	180	300
PU 036	70	130	PU 097	110	150	PU 158	140	280	PU 219	190	190
PU 037	70	140	PU 098	110	160	PU 159	140	290	PU 220	190	200
PU 038	70	150	PU 099	110	170	PU 160	140	300	PU 221	190	210
PU 039	70	160	PU 100	110	180	PU 161	150	150	PU 222	190	220
PU 040	70	170	PU 101	110	190	PU 162	150	160	PU 223	190	230
PU 041	70	180	PU 102	110	200	PU 163	150	170	PU 224	190	240
PU 042	70	190	PU 103	110	210	PU 164	150	180	PU 225	190	250
PU 043	70	200	PU 104	110	220	PU 165	150	190	PU 226	190	260
PU 044	75	80	PU 105	110	230	PU 166	150	200	PU 227	190	270
PU 045	75	90	PU 106	110	240	PU 167	150	210	PU 228	190	280
PU 046	75	100	PU 107	110	250	PU 168	150	220	PU 229	190	290
PU 047	75	110	PU 108	120	120	PU 169	150	230	PU 230	190	300
PU 048	75	120	PU 109	120	130	PU 170	150	240	PU 231	200	200
PU 049	75	130	PU 110	120	140	PU 171	150	250	PU 232	200	210
PU 050	75	140	PU 111	120	150	PU 172	150	260	PU 233	200	220
PU 051	75	150	PU 112	120	160	PU 173	150	270	PU 234	200	230
PU 052	80	80	PU 113	120	170	PU 174	150	280	PU 235	200	240
PU 053	80	90	PU 114	120	180	PU 175	150	290	PU 236	200	250
PU 054	80	100	PU 115	120	190	PU 176	150	300	PU 237	200	260
PU 055	80	110	PU 116	120	200	PU 177	160	160	PU 238	200	270
PU 056	80	120	PU 117	120	210	PU 178	160	170	PU 239	200	280
PU 057	80	130	PU 118	120	220	PU 179	160	180	PU 240	200	290
PU 058	80	140	PU 119	120	230	PU 180	160	190	PU 241	200	300
PU 059	80	150	PU 120	120	240	PU 181	160	200			
PU 060	80	160	PU 121	120	250	PU 182	160	210			
PU 061	80	170	PU 122	120	260	PU 183	160	220			

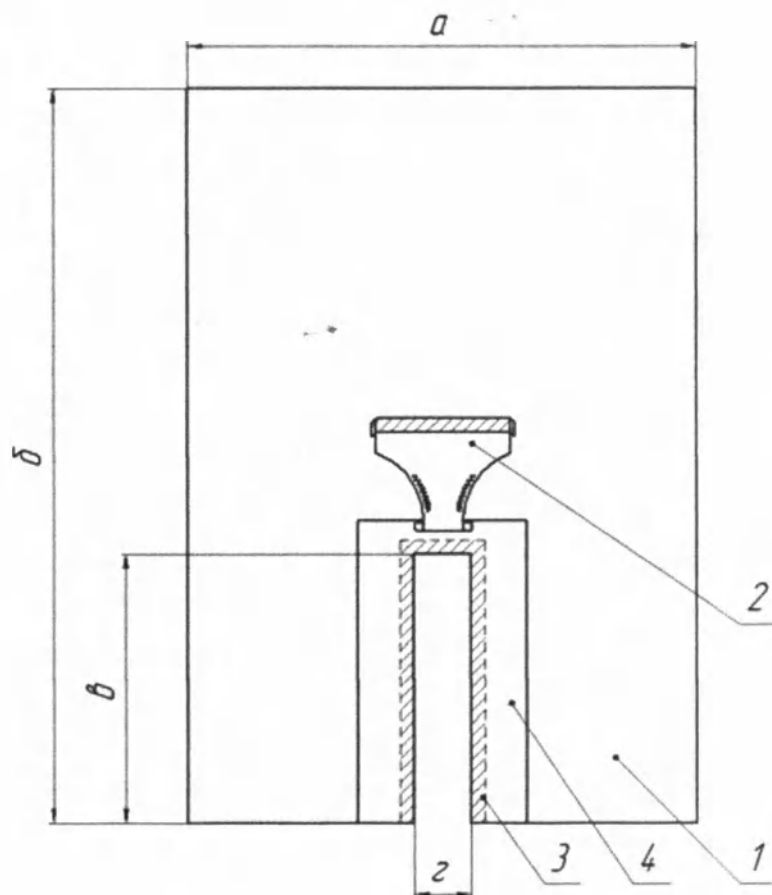

1-Полотно, 2-Перинеальное покрытие, 3-Липкий край, 4-Впитывающая зона

Рисунок А.9 – Простыня с вырезом (Варианты исполнения: с/без липкого края, с/без перинеального покрытия, с/без впитывающей зоной, исполнения по габаритным размерам в таблице А.11, по размерам выреза в таблице А.12)

Таблица А.11

Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см
PV 001	100	120	PV 052	150	210	PV 103	180	310	PV 154	220	280
PV 002	100	150	PV 053	150	220	PV 104	190	190	PV 155	220	290
PV 003	100	160	PV 054	150	230	PV 105	190	200	PV 156	220	300
PV 004	100	170	PV 055	150	240	PV 106	190	210	PV 157	220	310
PV 005	100	180	PV 056	150	250	PV 107	190	220	PV 158	220	320
PV 006	100	190	PV 057	150	260	PV 108	190	230	PV 159	220	330
PV 007	100	200	PV 058	150	270	PV 109	190	240	PV 160	220	340
PV 008	100	210	PV 059	150	280	PV 110	190	250	PV 161	220	350
PV 009	100	220	PV 060	150	290	PV 111	190	260	PV 162	230	230
PV 010	100	230	PV 061	150	300	PV 112	190	270	PV 163	230	240
PV 011	100	240	PV 062	160	160	PV 113	190	280	PV 164	230	250
PV 012	100	250	PV 063	160	170	PV 114	190	290	PV 165	230	260
PV 013	110	150	PV 064	160	180	PV 115	190	300	PV 166	230	270
PV 014	110	160	PV 065	160	190	PV 116	190	310	PV 167	230	280
PV 015	110	170	PV 066	160	200	PV 117	190	320	PV 168	230	290
PV 016	110	180	PV 067	160	210	PV 118	200	200	PV 169	230	300
PV 017	110	190	PV 068	160	220	PV 119	200	210	PV 170	230	310
PV 018	110	200	PV 069	160	230	PV 120	200	220	PV 171	230	320
PV 019	110	210	PV 070	160	240	PV 121	200	230	PV 172	230	330
PV 020	110	220	PV 071	160	250	PV 122	200	240	PV 173	230	340
PV 021	110	230	PV 072	160	260	PV 123	200	250	PV 174	230	350
PV 022	110	240	PV 073	160	270	PV 124	200	260	PV 175	235	240
PV 023	110	250	PV 074	160	280	PV 125	200	270	PV 176	235	250

Обозна чение	а, см	б, см
PV 024	120	150
PV 025	120	160
PV 026	120	170
PV 027	120	180
PV 028	120	190
PV 029	120	200
PV 030	120	210
PV 031	120	220
PV 032	120	230
PV 033	120	240
PV 034	120	250
PV 035	130	150
PV 036	130	160
PV 037	130	170
PV 038	130	180
PV 039	130	190
PV 040	130	200
PV 041	130	210
PV 042	130	220
PV 043	130	230
PV 044	130	240
PV 045	130	250
PV 046	150	150
PV 047	150	160
PV 048	150	170
PV 049	150	180
PV 050	150	190
PV 051	150	200

Обозна чение	а, см	б, см
PV 075	160	290
PV 076	170	170
PV 077	170	180
PV 078	170	190
PV 079	170	200
PV 080	170	210
PV 081	170	220
PV 082	170	230
PV 083	170	240
PV 084	170	250
PV 085	170	260
PV 086	170	270
PV 087	170	280
PV 088	170	290
PV 089	170	300
PV 090	180	180
PV 091	180	190
PV 092	180	200
PV 093	180	210
PV 094	180	220
PV 095	180	230
PV 096	180	240
PV 097	180	250
PV 098	180	260
PV 099	180	270
PV 100	180	280
PV 101	180	290
PV 102	180	300

Обозна чение	а, см	б, см
PV 126	200	280
PV 127	200	290
PV 128	200	300
PV 129	200	310
PV 130	200	320
PV 131	200	330
PV 132	205	206
PV 133	210	210
PV 134	210	220
PV 135	210	230
PV 136	210	240
PV 137	210	250
PV 138	210	260
PV 139	210	270
PV 140	210	280
PV 141	210	290
PV 142	210	300
PV 143	210	310
PV 144	210	320
PV 145	210	330
PV 146	210	340
PV 147	210	350
PV 148	220	220
PV 149	220	230
PV 150	220	240
PV 151	220	250
PV 152	220	260
PV 153	220	270

Обозна чение	а, см	б, см
PV 177	235	260
PV 178	235	270
PV 179	235	280
PV 180	235	290
PV 181	235	300
PV 182	235	310
PV 183	235	320
PV 184	235	330
PV 185	235	340
PV 186	235	350
PV 187	240	240
PV 188	240	250
PV 189	240	260
PV 190	240	270
PV 191	240	280
PV 192	240	290
PV 193	240	300
PV 194	240	310
PV 195	240	320
PV 196	240	330
PV 197	240	340
PV 198	240	350
PV 199	250	250
PV 200	250	260
PV 201	250	270
PV 202	250	280
PV 203	250	290
PV 204	250	300


Таблица А.12

Обозна чение	в, см	г, см
VP 001	5	20
VP 002	5	25
VP 003	5	30
VP 004	5	35
VP 005	5	40
VP 006	5	45
VP 007	5	50
VP 008	6,5	20
VP 009	6,5	25
VP 010	6,5	30
VP 011	6,5	35
VP 012	6,5	40
VP 013	6,5	45
VP 014	6,5	50
VP 015	10	20
VP 016	10	25
VP 017	10	30
VP 018	10	35
VP 019	10	40
VP 020	10	45
VP 021	10	50
VP 022	10	55

Обозна чение	в, см	г, см
VP 023	10	60
VP 024	15	40
VP 025	15	45
VP 026	15	50
VP 027	15	55
VP 028	15	60
VP 029	15	70
VP 030	15	80
VP 031	18	40
VP 032	18	45
VP 033	18	50
VP 034	18	55
VP 035	18	60
VP 036	18	70
VP 037	18	80
VP 038	20	40
VP 039	20	45
VP 040	20	50
VP 041	20	55
VP 042	20	60
VP 043	20	70
VP 044	20	80

Обозна чение	в, см	г, см
VP 045	20	90
VP 046	20	95
VP 047	20	100
VP 048	30	50
VP 049	30	55
VP 050	30	60
VP 051	30	70
VP 052	30	80
VP 053	30	90
VP 054	30	95
VP 055	30	100
VP 056	40	50
VP 057	40	55
VP 058	40	60
VP 059	40	70
VP 060	40	80
VP 061	40	90
VP 062	40	95
VP 063	40	100
VP 064	40	110
VP 065	40	120
VP 066	50	60

Обозна чение	в, см	г, см
VP 067	50	70
VP 068	50	80
VP 069	50	90
VP 070	50	95
VP 071	50	100
VP 072	50	110
VP 073	50	120
VP 074	60	60
VP 075	60	70
VP 076	60	80
VP 077	60	90
VP 078	60	95
VP 079	60	100
VP 080	60	110
VP 081	60	120
VP 082	70	80
VP 083	70	90
VP 084	70	95
VP 085	70	100
VP 086	70	110
VP 087	70	120

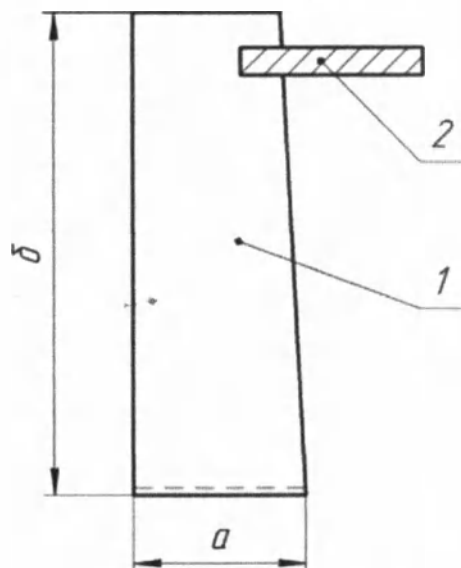

1-Полотно, 2-Липкий край

Рисунок А.10 - Бахила операционная (Варианты исполнения: с/без липкого края, исполнения по размерам в таблице А.13)

Таблица А.13

Обозначение	а, см	б, см
В 001	30	15
В 002	30	20
В 003	30	22
В 004	30	25
В 005	30	30
В 006	30	35
В 007	30	36
В 008	30	40
В 009	30	45
В 010	30	50
В 011	30	55
В 012	30	60
В 013	30	65
В 014	30	70
В 015	30	75
В 016	30	80
В 017	30	90
В 018	30	100
В 019	30	120

Обозначение	а, см	б, см
В 020	35	15
В 021	35	20
В 022	35	22
В 023	35	25
В 024	35	30
В 025	35	35
В 026	35	36
В 027	35	40
В 028	35	45
В 029	35	50
В 030	35	55
В 031	35	60
В 032	35	65
В 033	35	70
В 034	35	75
В 035	35	80
В 036	35	90
В 037	35	100
В 038	35	120

Обозначение	а, см	б, см
В 039	40	15
В 040	40	20
В 041	40	22
В 042	40	25
В 043	40	30
В 044	40	35
В 045	40	36
В 046	40	40
В 047	40	45
В 048	40	50
В 049	40	55
В 050	40	60
В 051	40	65
В 052	40	70
В 053	40	75
В 054	40	80
В 055	40	90
В 056	40	100
В 057	40	120


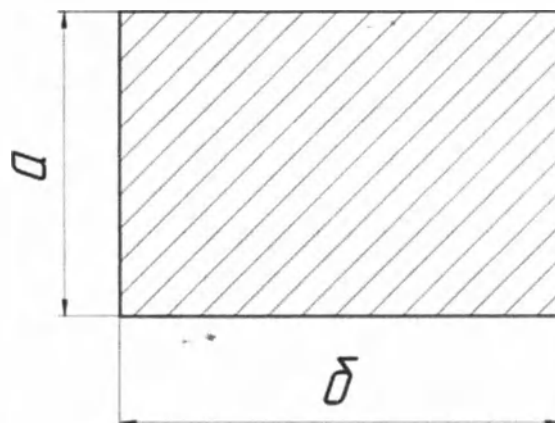


Рисунок А.11 – Операционная пленка (Варианты исполнения по размерам в таблице А.14)

Таблица А.14


Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см
ОР 001	10	10	ОР 038	20	27	ОР 075	27	60	ОР 112	37	47
ОР 002	10	12	ОР 039	20	30	ОР 076	30	30	ОР 113	37	50
ОР 003	10	15	ОР 040	20	33	ОР 077	30	33	ОР 114	37	60
ОР 004	10	17	ОР 041	20	35	ОР 078	30	35	ОР 115	37	70
ОР 005	10	20	ОР 042	20	37	ОР 079	30	37	ОР 116	37	80
ОР 006	10	22	ОР 043	20	40	ОР 080	30	40	ОР 117	40	40
ОР 007	10	25	ОР 044	22	22	ОР 081	30	42	ОР 118	40	42
ОР 008	10	27	ОР 045	22	25	ОР 082	30	45	ОР 119	40	45
ОР 009	10	30	ОР 046	22	27	ОР 083	30	47	ОР 120	40	47
ОР 010	12	12	ОР 047	22	30	ОР 084	30	50	ОР 121	40	50
ОР 011	12	15	ОР 048	22	33	ОР 085	30	60	ОР 122	40	60
ОР 012	12	17	ОР 049	22	35	ОР 086	30	70	ОР 123	40	70
ОР 013	12	20	ОР 050	22	37	ОР 087	33	33	ОР 124	40	80
ОР 014	12	22	ОР 051	22	40	ОР 088	33	35	ОР 125	42	42
ОР 015	12	25	ОР 052	25	25	ОР 089	33	37	ОР 126	42	45
ОР 016	12	27	ОР 053	25	27	ОР 090	33	40	ОР 127	42	47
ОР 017	12	30	ОР 054	25	30	ОР 091	33	42	ОР 128	42	50
ОР 018	15	15	ОР 055	25	33	ОР 092	33	45	ОР 129	42	60
ОР 019	15	17	ОР 056	25	35	ОР 093	33	47	ОР 130	42	70
ОР 020	15	20	ОР 057	25	37	ОР 094	33	50	ОР 131	42	80
ОР 021	15	22	ОР 058	25	40	ОР 095	33	60	ОР 132	45	45
ОР 022	15	25	ОР 059	25	42	ОР 096	33	70	ОР 133	45	47
ОР 023	15	27	ОР 060	25	45	ОР 097	33	80	ОР 134	45	50
ОР 024	15	30	ОР 061	25	47	ОР 098	35	35	ОР 135	45	60
ОР 025	17	17	ОР 062	25	50	ОР 099	35	37	ОР 136	45	70
ОР 026	17	20	ОР 063	25	60	ОР 100	35	40	ОР 137	45	80
ОР 027	17	22	ОР 064	25	70	ОР 101	35	42	ОР 138	47	47
ОР 028	17	25	ОР 065	27	27	ОР 102	35	45	ОР 139	47	50
ОР 029	17	27	ОР 066	27	30	ОР 103	35	47	ОР 140	47	60
ОР 030	17	30	ОР 067	27	33	ОР 104	35	50	ОР 141	47	70
ОР 031	17	33	ОР 068	27	35	ОР 105	35	60	ОР 142	47	80
ОР 032	17	35	ОР 069	27	37	ОР 106	35	70	ОР 143	50	50
ОР 033	17	37	ОР 070	27	40	ОР 107	35	80	ОР 144	50	60
ОР 034	17	40	ОР 071	27	42	ОР 108	37	37	ОР 145	50	70
ОР 035	20	20	ОР 072	27	45	ОР 109	37	40	ОР 146	50	80
ОР 036	20	22	ОР 073	27	47	ОР 110	37	42	ОР 147	55	70
ОР 037	20	25	ОР 074	27	50	ОР 111	37	45	ОР 148	60	80

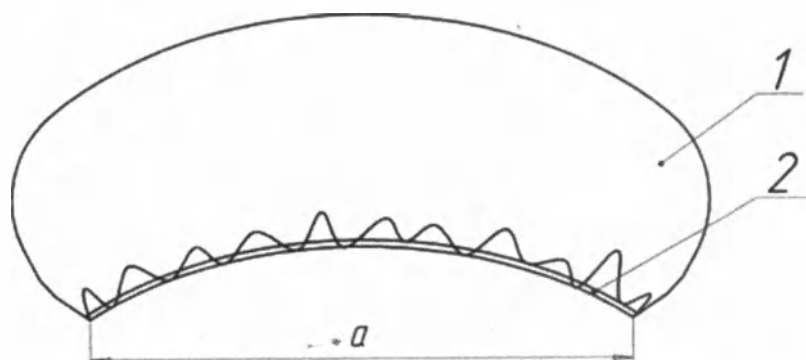

1-Полотно, 2-Резинка

Рисунок А.12 – Чехол на аппаратуру, тип А (Варианты исполнения по размерам в таблице А.15)
Таблица А.15

Обозначение	а, см
DA 001	10
DA 002	15
DA 003	20
DA 004	25
DA 005	30
DA 006	35
DA 007	40
DA 008	45
DA 009	50
DA 010	55
DA 011	60
DA 012	65
DA 013	70
DA 014	75
DA 015	80
DA 016	85
DA 017	90
DA 018	95
DA 019	100
DA 020	110
DA 021	120

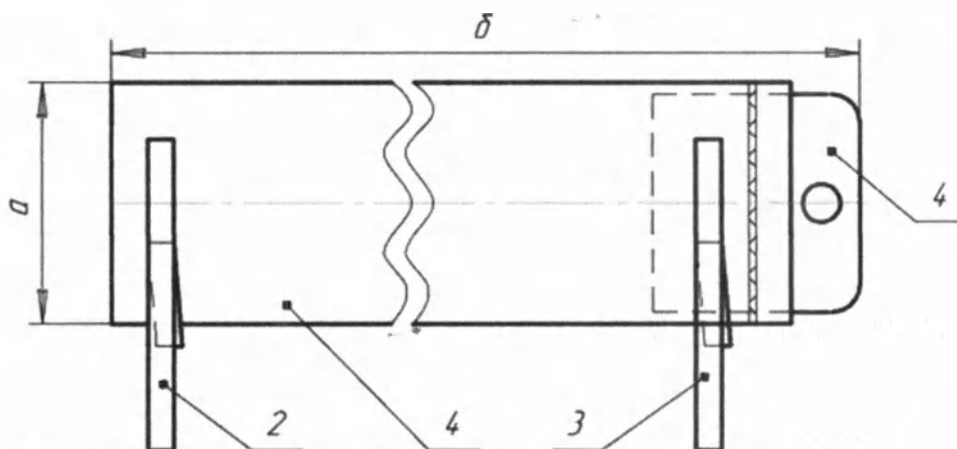

1-Рукав, 2, 3-Липкий край, 4-Держатель

Рисунок А.13 – Чехол на аппаратуру, тип В (Варианты исполнения: с/без держателя, с/без липкого края, исполнения по размерам в таблице А.16)


Таблица А.16

Обозначение	а, см	б, см
DB 001	10	100
DB 002	10	120
DB 003	10	140
DB 004	10	150
DB 005	10	160
DB 006	10	180
DB 007	10	200
DB 008	10	220
DB 009	10	240
DB 010	10	250
DB 011	10	300
DB 012	12	100
DB 013	12	120
DB 014	12	140
DB 015	12	150
DB 016	12	160
DB 017	12	180
DB 018	12	200
DB 019	12	220
DB 020	12	240
DB 021	12	250

Обозначение	а, см	б, см
DB 022	12	300
DB 023	14	100
DB 024	14	120
DB 025	14	140
DB 026	14	150
DB 027	14	160
DB 028	14	180
DB 029	14	200
DB 030	14	220
DB 031	14	240
DB 032	14	250
DB 033	14	300
DB 034	14	350
DB 035	15	100
DB 036	15	120
DB 037	15	140
DB 038	15	150
DB 039	15	160
DB 040	15	180
DB 041	15	200
DB 042	15	220

Обозначение	а, см	б, см
DB 043	15	240
DB 044	15	250
DB 045	15	300
DB 046	15	350
DB 047	16	100
DB 048	16	120
DB 049	16	140
DB 050	16	150
DB 051	16	160
DB 052	16	180
DB 053	16	200
DB 054	16	220
DB 055	16	240
DB 056	16	250
DB 057	16	300
DB 058	16	350
DB 059	18	100
DB 060	18	120
DB 061	18	140
DB 062	18	150
DB 063	18	160


Обозначение	а, см	б, см
DB 065	18	200
DB 066	18	220
DB 067	18	240
DB 068	18	250
DB 069	18	300
DB 070	18	350
DB 071	20	100
DB 072	20	120
DB 073	20	140
DB 074	20	150
DB 075	20	160
DB 076	20	180
DB 077	20	200
DB 078	20	220
DB 079	20	240
DB 080	20	250
DB 081	20	300
DB 082	20	350

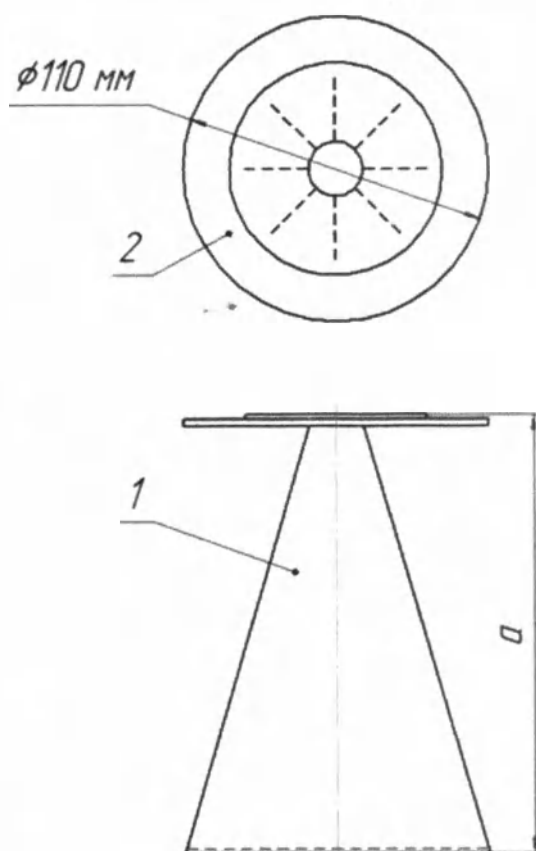

1-Рукав, 2-Фланец

Рисунок А.14 –Чехол на аппаратуру, тип С (Варианты исполнения по размерам в таблице А.17)
Таблица А.17

Обозначение	а, см
DC 001	10
DC 002	11
DC 003	12
DC 004	13
DC 005	14
DC 006	15
DC 007	16
DC 008	18
DC 009	20
DC 010	25

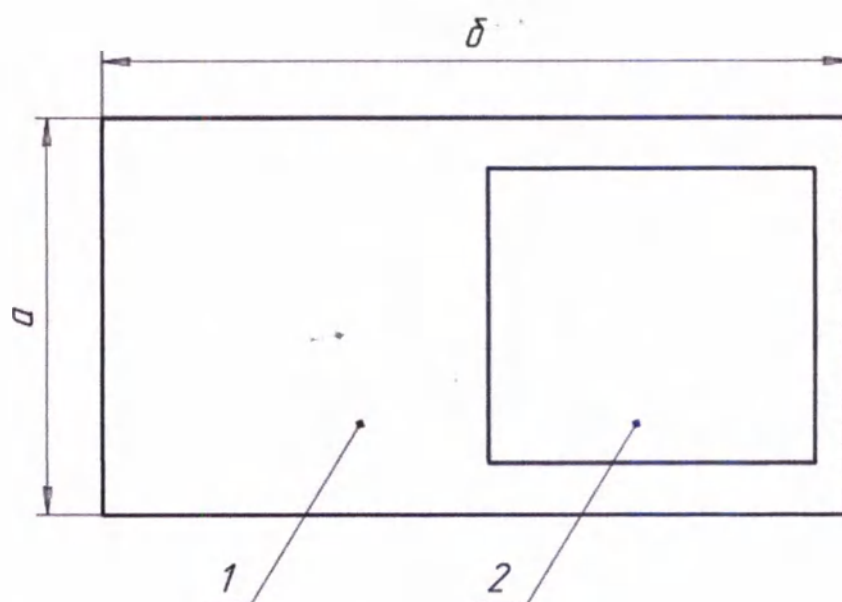

1-Рукав, 2-Впитывающая зона

Рисунок А.15 – Чехол на инструментальный стол (Варианты исполнения: с/без впитывающей зоны исполнения по размерам в таблице А.18)


Таблица А.18

Обозначение	а, см	б, см
CH 001	40	50
CH 002	40	60
CH 003	40	70
CH 004	40	75
CH 005	40	80
CH 006	40	90
CH 007	40	100
CH 008	50	50
CH 009	50	60
CH 010	50	70
CH 011	50	75
CH 012	50	80
CH 013	50	90
CH 014	50	100
CH 015	60	70

Обозначение	а, см	б, см
CH 016	60	75
CH 017	60	80
CH 018	60	90
CH 019	60	100
CH 020	60	110
CH 021	60	120
CH 022	60	130
CH 023	60	145
CH 024	70	70
CH 025	70	75
CH 026	70	80
CH 027	70	90
CH 028	70	100
CH 029	70	110
CH 030	70	120

Обозначение	а, см	б, см
CH 031	70	130
CH 032	70	145
CH 033	80	80
CH 034	80	90
CH 035	80	100
CH 036	80	110
CH 037	80	120
CH 038	80	130
CH 039	80	145
CH 040	80	150
CH 041	80	175
CH 042	90	90
CH 043	90	100
CH 044	90	110
CH 045	90	120

Обозначение	а, см	б, см
CH 046	90	130
CH 047	90	145
CH 048	90	150
CH 049	90	175
CH 050	90	200
CH 051	100	100
CH 052	100	110
CH 053	100	120
CH 054	100	130
CH 055	100	145
CH 056	100	150
CH 057	100	175
CH 058	100	200
CH 059	110	180
CH 060	120	200

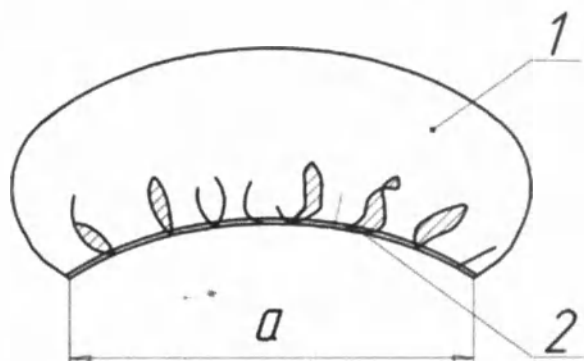


1-Полотно, 2-Резинка

Рисунок А.16 – Шапочка, тип А (Варианты исполнения по размерам в таблице А.19)

Таблица А.19

Обозначение	а, мм
A1	495
A2	510
A3	520

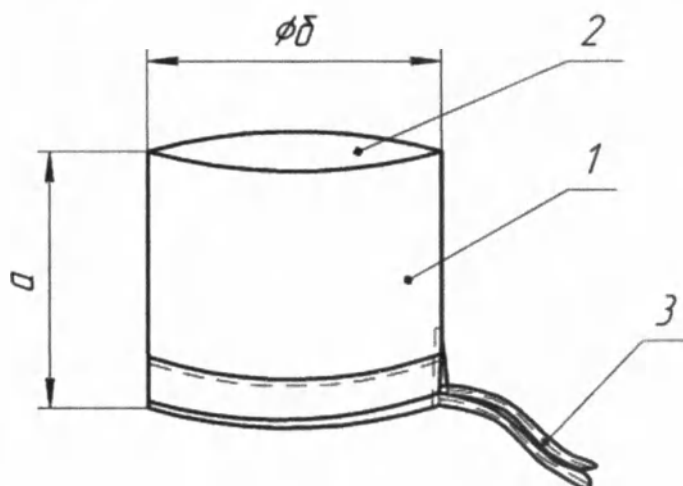


1-Полотно, 2-Дно, 3-Завязки

Рисунок А.17 – Шапочка, тип В (Варианты исполнения по размерам в таблице А.20)

Таблица А.20

Обозначение	а, мм	б, мм
B1	160	170
B2	180	180
B3	200	190
B4	220	200

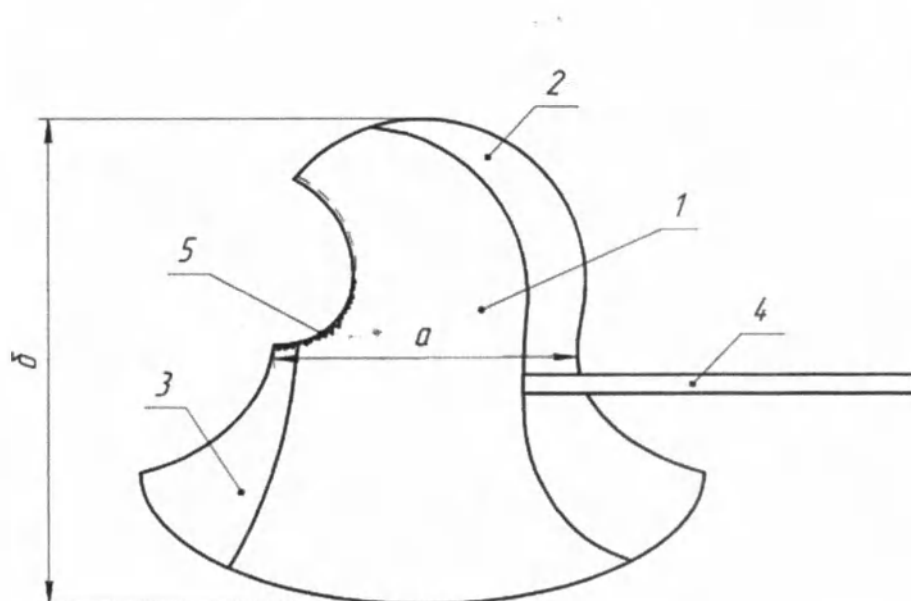

1-Бок, 2-Задник, 3-Перед, 4-Завязки, 5-резинка

Рисунок А.18 – Шапочка, тип С (Варианты исполнения по размерам в таблице А.21)

Таблица А.21

Обозначение	а, мм	б, мм
С1	310	520
С2	330	530
С3	340	540

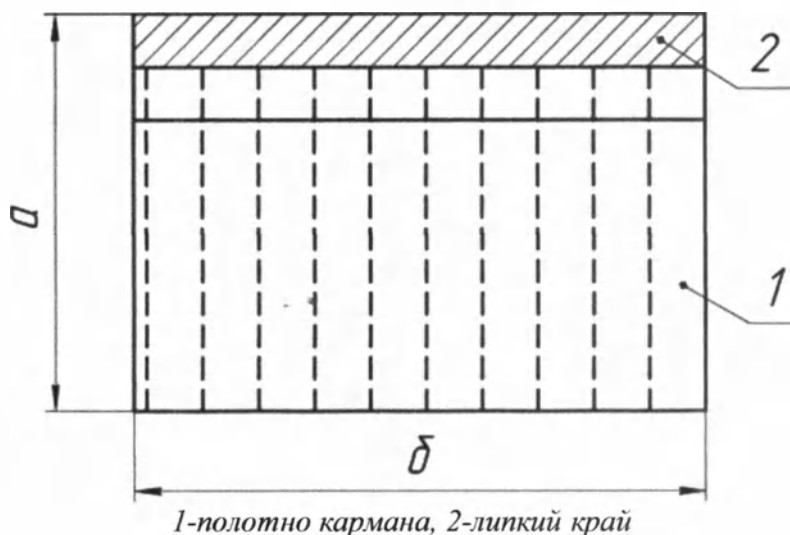


Рисунок А.19 - Карман-приемник (Варианты исполнения: количество секций кармана: 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 или 10, размеры в таблице А.22)

Таблица А.22

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 001	20	30
КР 002	25	30
КР 003	30	30
КР 004	35	30
КР 005	40	30
КР 006	45	30
КР 007	50	30
КР 008	20	35
КР 009	25	35
КР 010	30	35
КР 011	35	35
КР 012	40	35
КР 013	45	35
КР 014	50	35
КР 015	55	35
КР 016	60	35
КР 017	70	35
КР 018	35	37,5
КР 019	40	38
КР 020	20	40
КР 021	25	40
КР 022	30	40
КР 023	35	40
КР 024	40	40
КР 025	45	40
КР 026	50	40
КР 027	55	40
КР 028	60	40
КР 029	70	40

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 030	37,5	43
КР 031	20	45
КР 032	25	45
КР 033	30	45
КР 034	35	45
КР 035	37	45
КР 036	40	45
КР 037	45	45
КР 038	50	45
КР 039	55	45
КР 040	60	45
КР 041	70	45
КР 042	22,5	47
КР 043	20	50
КР 044	25	50
КР 045	30	50
КР 046	32	50
КР 047	35	50
КР 048	37,5	50
КР 049	40	50
КР 050	45	50
КР 051	50	50
КР 052	55	50
КР 053	60	50
КР 054	70	50
КР 055	20	55
КР 056	25	55
КР 057	30	55
КР 058	35	55

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 059	40	55
КР 060	45	55
КР 061	50	55
КР 062	55	55
КР 063	60	55
КР 064	70	55
КР 065	20	60
КР 066	25	60
КР 067	30	60
КР 068	35	60
КР 069	40	60
КР 070	45	60
КР 071	50	60
КР 072	55	60
КР 073	60	60
КР 074	70	60
КР 075	20	70
КР 076	25	70
КР 077	30	70
КР 078	35	70
КР 079	40	70
КР 080	45	70
КР 081	50	70
КР 082	55	70
КР 083	60	70
КР 084	70	70
КР 085	37,5	72
КР 086	20	80
КР 087	25	80

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 088	30	80
КР 089	35	80
КР 090	40	80
КР 091	45	80
КР 092	50	80
КР 093	55	80
КР 094	60	80
КР 095	70	80
КР 096	20	90
КР 097	25	90
КР 098	30	90
КР 099	35	90
КР 100	40	90
КР 101	45	90
КР 102	50	90
КР 103	55	90
КР 104	60	90
КР 105	70	90
КР 106	40	100
КР 107	45	100
КР 108	50	100
КР 109	55	100
КР 110	60	100
КР 111	70	100

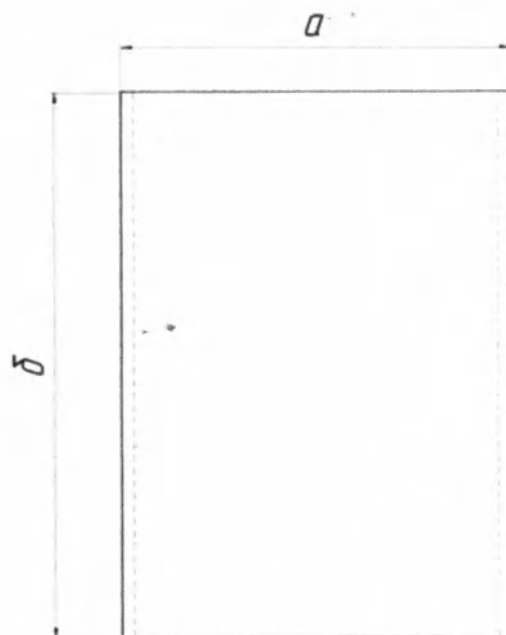



Рисунок А.20 – Мешок (Варианты исполнения по размерам в таблице А.23)

Таблица А.23

Обозначение	а, см	б, см
М 001	40	40
М 002	40	45
М 003	40	50
М 004	40	55
М 005	40	60
М 006	40	65
М 007	40	70
М 008	40	75
М 009	40	80
М 010	45	45
М 011	45	50
М 012	45	55
М 013	45	60
М 014	45	65
М 015	45	70
М 016	45	75
М 017	45	80

Обозначение	а, см	б, см
М 018	50	50
М 019	50	55
М 020	50	60
М 021	50	65
М 022	50	70
М 023	50	75
М 024	50	80
М 025	55	55
М 026	55	60
М 027	55	65
М 028	55	70
М 029	55	75
М 030	55	80
М 031	60	60
М 032	60	65
М 033	60	70
М 034	60	75

Обозначение	а, см	б, см
М 035	60	80
М 036	60	90
М 037	60	100
М 038	70	70
М 039	70	75
М 040	70	80
М 041	70	90
М 042	70	100
М 043	70	110
М 044	70	120
М 045	80	80
М 046	80	90
М 047	80	100
М 048	80	110
М 049	80	120
М 050	90	90
М 051	90	120

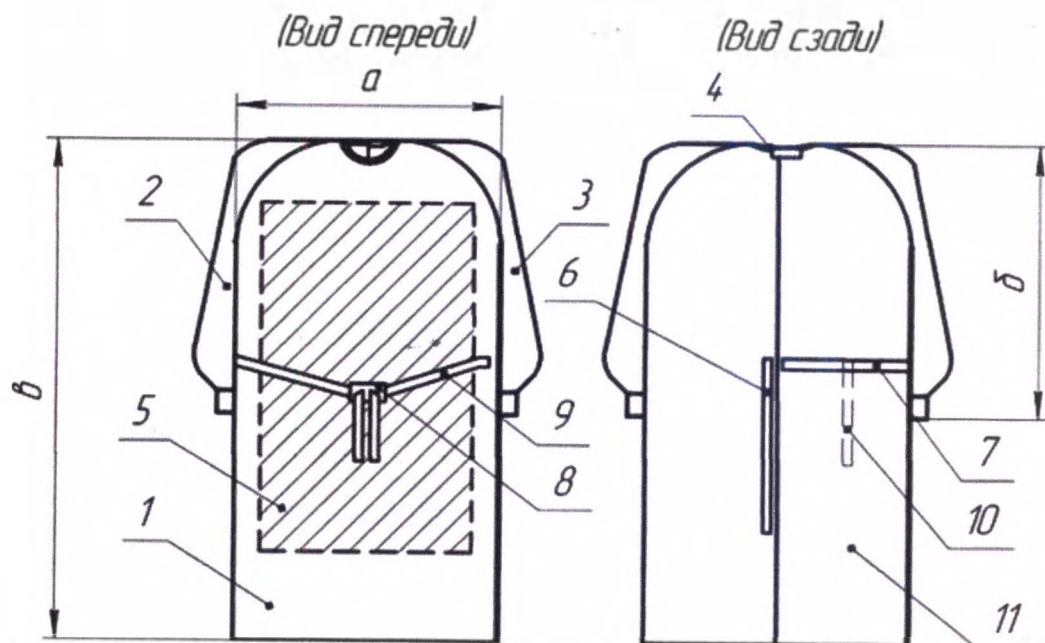

1-Полочка, 2,3-Рукава, 4-Горловина, 5-Дополнительная зона, 6,7,8,9,10-Завязки, 8-Барьер, 11-Спинка


Рисунок А.21– Халат хирургический (Варианты исполнения: горловина на завязках или на застёжке, с/без дополнительной зоны, с/без барьера, рукава на резинке или на манжете; исполнения по размерам в таблице А.24)

Таблица А.24

Обозначение	в, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды	Обозначение	в, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды
G44-1.0	1000	710	760	44 (42 – 44)	G46-1.0	1000	730	780	46 (44 – 46)
G44-1.1	1100				G46-1.1	1100			
G44-1.2	1200				G46-1.2	1200			
G44-1.3	1300				G46-1.3	1300			
G44-1.4	1400				G46-1.4	1400			
G44-1.5	1500				G46-1.5	1500			
G44-1.6	1600				G46-1.6	1600			
G48-1.0	1000	750	800	48 (46 – 48)	G50-1.0	1000	770	825	50 (48 – 50)
G48-1.1	1100				G50-1.1	1100			
G48-1.2	1200				G50-1.2	1200			
G48-1.3	1300				G50-1.3	1300			
G48-1.4	1400				G50-1.4	1400			
G48-1.5	1500				G50-1.5	1500			
G48-1.6	1600				G50-1.6	1600			
G52-1.0	1000	790	850	52 (50 – 52)	G54-1.0	1000	810	870	54 (52 – 54)
G52-1.1	1100				G54-1.1	1100			
G52-1.2	1200				G54-1.2	1200			
G52-1.3	1300				G54-1.3	1300			
G52-1.4	1400				G54-1.4	1400			
G52-1.5	1520				G54-1.5	1540			
G52-1.6	1600				G54-1.6	1600			
G56-1.0	1000	830	885	56 (54 – 56)	G58-1.0	1000	850	900	58 (56 – 58)
G56-1.1	1100				G58-1.1	1100			
G56-1.2	1200				G58-1.2	1200			
G56-1.3	1300				G58-1.3	1300			
G56-1.4	1400				G58-1.4	1400			
G56-1.5	1520				G58-1.5	1540			
G56-1.6	1600				G58-1.6	1600			
G60-1.0	1000	870	910	60 (58 – 60)	G62-1.0	1000	890	920	62 (60 – 62)

Таблица А.24

Обозначение	В, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды	Обозначение	В, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды
G60-1.1	1100				G62-1.1	1100			
G60-1.2	1200				G62-1.2	1200			
G60-1.3	1300				G62-1.3	1300			
G60-1.4	1400				G62-1.4	1400			
G60-1.5	1520				G62-1.5	1540			
G60-1.6	1600				G62-1.6	1600			
G64-1.0	1000	910	930	64 (62 – 64)	G66-1.0	1000	930	940	66 (64 – 66)
G64-1.1	1100				G66-1.1	1100			
G64-1.2	1200				G66-1.2	1200			
G64-1.3	1300				G66-1.3	1300			
G64-1.4	1400				G66-1.4	1400			
G64-1.5	1520				G66-1.5	1540			
G64-1.6	1600				G66-1.6	1600			

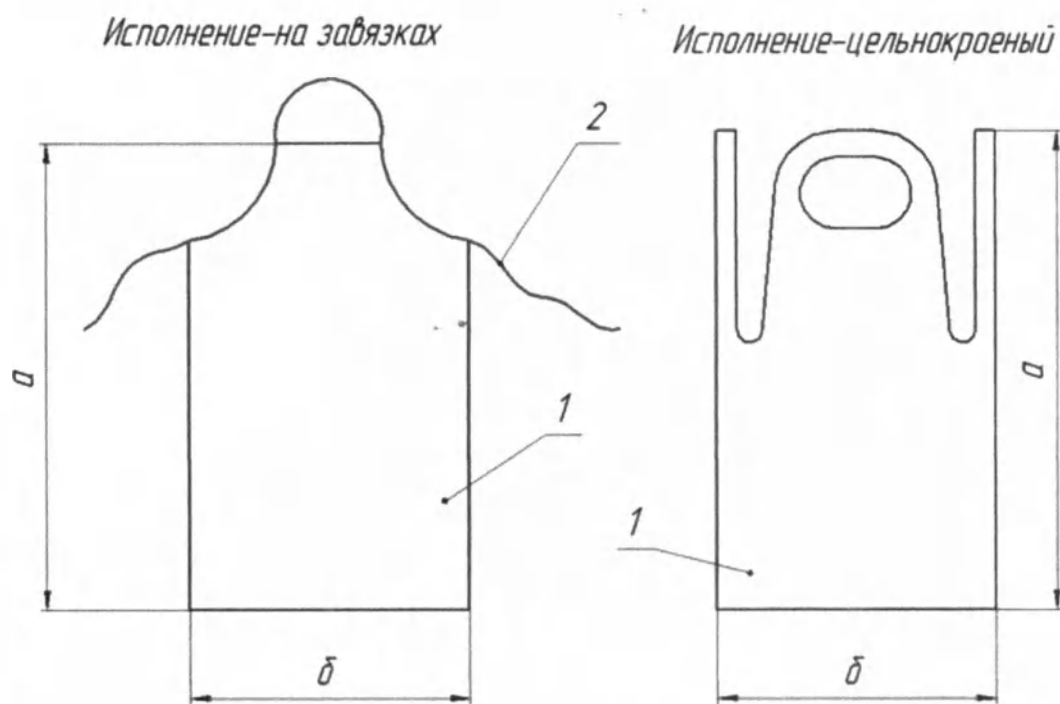


1-Полотно, 2-Завязки

Рисунок А.22 – Фартук (Варианты исполнения: на завязках или цельнокроеный, исполнения по размерам в таблице А.25)


Таблица А.25

Обозначение	а, мм	б, мм	Обозначение	а, мм	б, мм
F01	700	1000	F13	900	1000
F02		1100	F14		1100
F03		1200	F15		1200
F04		1300	F16		1300
F05		1400	F17		1400
F06		1500	F18		1500
F07	800	1000	F19	1000	1000
F08		1100	F20		1100
F09		1200	F21		1200
F10		1300	F22		1300
F11		1400	F23		1400
F12		1500	F24		1500

Исполнение на завязках

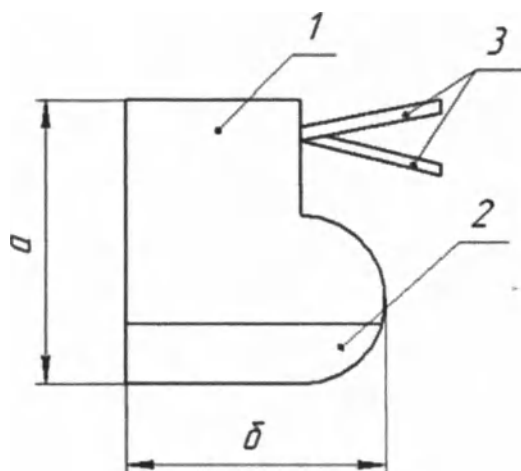

Исполнение на резинке

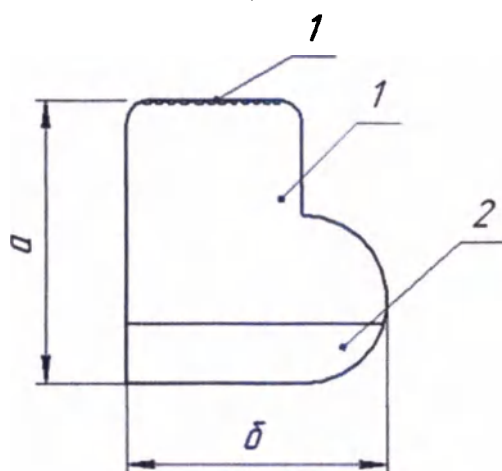

1-Полотно, 2-Дополнительная подошва, 3-Завязки, 4-Резинка

Рисунок А.23 – Бахилы (Варианты исполнения: с/без дополнительной подошвы, на резинке или на завязках, исполнения по размерам в таблице А.26)

Таблица А.26 – Размеры бахил

Обозначение	а, мм	б, мм	Обозначение	а, мм	б, мм
В01	150	350	В12	150	400
В02	200		В13	200	
В03	220		В14	220	
В04	250		В15	250	
В05	300		В16	300	
В06	360		В17	360	
В07	400		В18	400	
В08	450		В19	450	
В09	500		В20	500	
В10	550		В21	550	
В11	600		В22	600	



Рисунок А.24 – Наручники (Варианты исполнения: на манжете или на резинке исполнения по размерам в таблице А.27)

Таблица А.27

Обозначение	а, мм	б, мм
N01	260	300
N02	260	500
N03	260	600


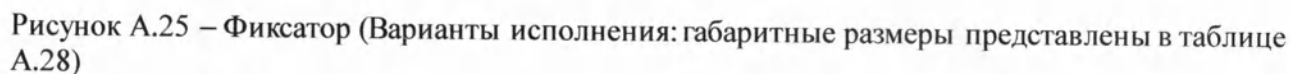


Таблица А.28

Обозначение	а, см	б, см
FP 001	1,5	10
FP 002	1,5	15
FP 003	1,5	20
FP 004	1,5	25
FP 005	1,5	30
FP 006	1,5	35
FP 007	1,5	40
FP 008	1,5	45
FP 009	1,5	50
FP 010	2	10
FP 011	2	15
FP 012	2	20
FP 013	2	25
FP 014	2	30
FP 015	2	35
FP 016	2	40

Обозначение	а, см	б, см
FP 017	2	45
FP 018	2	50
FP 019	2,5	10
FP 020	2,5	15
FP 021	2,5	20
FP 022	2,5	30
FP 023	2,5	40
FP 024	2,5	50
FP 025	3	10
FP 026	3	15
FP 027	3	20
FP 028	3	30
FP 029	3	40
FP 030	3	50
FP 031	5	10
FP 032	5	20

[illegible]

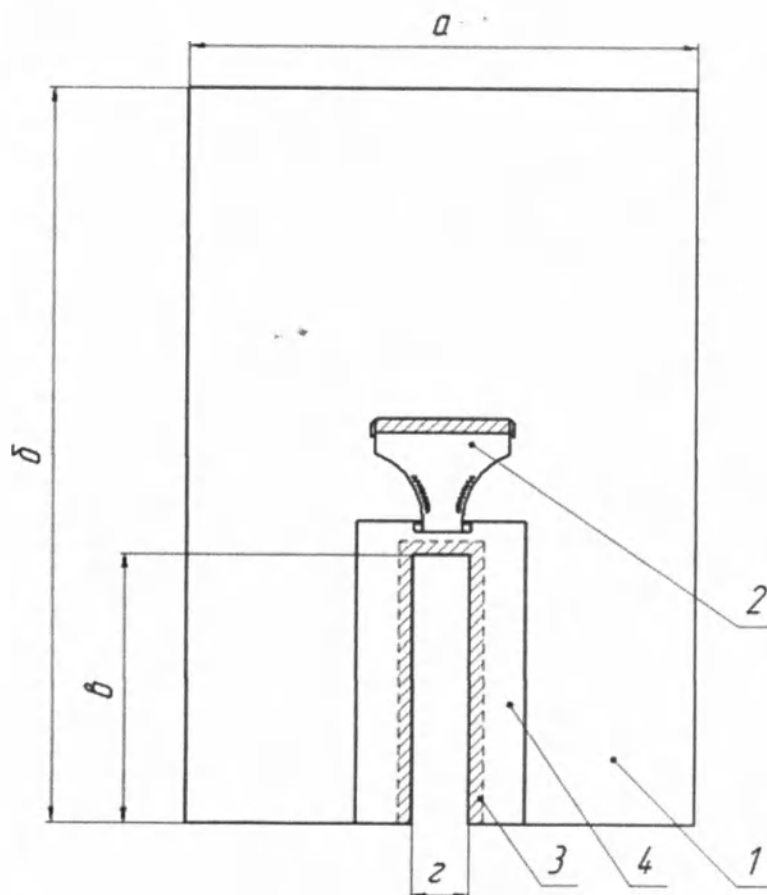

1-Полотно, 2-Перинеальное покрытие, 3-Липкий край, 4-Впитывающая зона

Рисунок А.9 – Простыня с вырезом (Варианты исполнения: с/без липкого края, с/без перинеального покрытия, с/без впитывающей зоной, исполнения по габаритным размерам в таблице А.11, по размерам выреза в таблице А.12)

Таблица А.11

Обозначение	а, см	б, см
PV 001	100	120
PV 002	100	150
PV 003	100	160
PV 004	100	170
PV 005	100	180
PV 006	100	190
PV 007	100	200
PV 008	100	210
PV 009	100	220
PV 010	100	230
PV 011	100	240
PV 012	100	250
PV 013	110	150
PV 014	110	160
PV 015	110	170
PV 016	110	180
PV 017	110	190
PV 018	110	200
PV 019	110	210
PV 020	110	220
PV 021	110	230
PV 022	110	240
PV 023	110	250

Обозначение	а, см	б, см
PV 052	150	210
PV 053	150	220
PV 054	150	230
PV 055	150	240
PV 056	150	250
PV 057	150	260
PV 058	150	270
PV 059	150	280
PV 060	150	290
PV 061	150	300
PV 062	160	160
PV 063	160	170
PV 064	160	180
PV 065	160	190
PV 066	160	200
PV 067	160	210
PV 068	160	220
PV 069	160	230
PV 070	160	240
PV 071	160	250
PV 072	160	260
PV 073	160	270
PV 074	160	280

Обозначение	а, см	б, см
PV 103	180	310
PV 104	190	190
PV 105	190	200
PV 106	190	210
PV 107	190	220
PV 108	190	230
PV 109	190	240
PV 110	190	250
PV 111	190	260
PV 112	190	270
PV 113	190	280
PV 114	190	290
PV 115	190	300
PV 116	190	310
PV 117	190	320
PV 118	200	200
PV 119	200	210
PV 120	200	220
PV 121	200	230
PV 122	200	240
PV 123	200	250
PV 124	200	260
PV 125	200	270

Обозначение	а, см	б, см
PV 154	220	280
PV 155	220	290
PV 156	220	300
PV 157	220	310
PV 158	220	320
PV 159	220	330
PV 160	220	340
PV 161	220	350
PV 162	230	230
PV 163	230	240
PV 164	230	250
PV 165	230	260
PV 166	230	270
PV 167	230	280
PV 168	230	290
PV 169	230	300
PV 170	230	310
PV 171	230	320
PV 172	230	330
PV 173	230	340
PV 174	230	350
PV 175	235	240
PV 176	235	250

Обозна- чение	а, см	б, см
PV 024	120	150
PV 025	120	160
PV 026	120	170
PV 027	120	180
PV 028	120	190
PV 029	120	200
PV 030	120	210
PV 031	120	220
PV 032	120	230
PV 033	120	240
PV 034	120	250
PV 035	130	150
PV 036	130	160
PV 037	130	170
PV 038	130	180
PV 039	130	190
PV 040	130	200
PV 041	130	210
PV 042	130	220
PV 043	130	230
PV 044	130	240
PV 045	130	250
PV 046	150	150
PV 047	150	160
PV 048	150	170
PV 049	150	180
PV 050	150	190
PV 051	150	200

Обозна- чение	а, см	б, см
PV 075	160	290
PV 076	170	170
PV 077	170	180
PV 078	170	190
PV 079	170	200
PV 080	170	210
PV 081	170	220
PV 082	170	230
PV 083	170	240
PV 084	170	250
PV 085	170	260
PV 086	170	270
PV 087	170	280
PV 088	170	290
PV 089	170	300
PV 090	180	180
PV 091	180	190
PV 092	180	200
PV 093	180	210
PV 094	180	220
PV 095	180	230
PV 096	180	240
PV 097	180	250
PV 098	180	260
PV 099	180	270
PV 100	180	280
PV 101	180	290
PV 102	180	300

Обозна- чение	а, см	б, см
PV 126	200	280
PV 127	200	290
PV 128	200	300
PV 129	200	310
PV 130	200	320
PV 131	200	330
PV 132	205	206
PV 133	210	210
PV 134	210	220
PV 135	210	230
PV 136	210	240
PV 137	210	250
PV 138	210	260
PV 139	210	270
PV 140	210	280
PV 141	210	290
PV 142	210	300
PV 143	210	310
PV 144	210	320
PV 145	210	330
PV 146	210	340
PV 147	210	350
PV 148	220	220
PV 149	220	230
PV 150	220	240
PV 151	220	250
PV 152	220	260
PV 153	220	270

Обозна- чение	а, см	б, см
PV 177	235	260
PV 178	235	270
PV 179	235	280
PV 180	235	290
PV 181	235	300
PV 182	235	310
PV 183	235	320
PV 184	235	330
PV 185	235	340
PV 186	235	350
PV 187	240	240
PV 188	240	250
PV 189	240	260
PV 190	240	270
PV 191	240	280
PV 192	240	290
PV 193	240	300
PV 194	240	310
PV 195	240	320
PV 196	240	330
PV 197	240	340
PV 198	240	350
PV 199	250	250
PV 200	250	260
PV 201	250	270
PV 202	250	280
PV 203	250	290
PV 204	250	300


Таблица А.12

Обозна- чение	в, см	г, см
VP 001	5	20
VP 002	5	25
VP 003	5	30
VP 004	5	35
VP 005	5	40
VP 006	5	45
VP 007	5	50
VP 008	6,5	20
VP 009	6,5	25
VP 010	6,5	30
VP 011	6,5	35
VP 012	6,5	40
VP 013	6,5	45
VP 014	6,5	50
VP 015	10	20
VP 016	10	25
VP 017	10	30
VP 018	10	35
VP 019	10	40
VP 020	10	45
VP 021	10	50
VP 022	10	55

Обозна- чение	в, см	г, см
VP 023	10	60
VP 024	15	40
VP 025	15	45
VP 026	15	50
VP 027	15	55
VP 028	15	60
VP 029	15	70
VP 030	15	80
VP 031	18	40
VP 032	18	45
VP 033	18	50
VP 034	18	55
VP 035	18	60
VP 036	18	70
VP 037	18	80
VP 038	20	40
VP 039	20	45
VP 040	20	50
VP 041	20	55
VP 042	20	60
VP 043	20	70
VP 044	20	80

Обозна- чение	в, см	г, см
VP 045	20	90
VP 046	20	95
VP 047	20	100
VP 048	30	50
VP 049	30	55
VP 050	30	60
VP 051	30	70
VP 052	30	80
VP 053	30	90
VP 054	30	95
VP 055	30	100
VP 056	40	50
VP 057	40	55
VP 058	40	60
VP 059	40	70
VP 060	40	80
VP 061	40	90
VP 062	40	95
VP 063	40	100
VP 064	40	110
VP 065	40	120
VP 066	50	60

Обозна- чение	в, см	г, см
VP 067	50	70
VP 068	50	80
VP 069	50	90
VP 070	50	95
VP 071	50	100
VP 072	50	110
VP 073	50	120
VP 074	60	60
VP 075	60	70
VP 076	60	80
VP 077	60	90
VP 078	60	95
VP 079	60	100
VP 080	60	110
VP 081	60	120
VP 082	70	80
VP 083	70	90
VP 084	70	95
VP 085	70	100
VP 086	70	110
VP 087	70	120

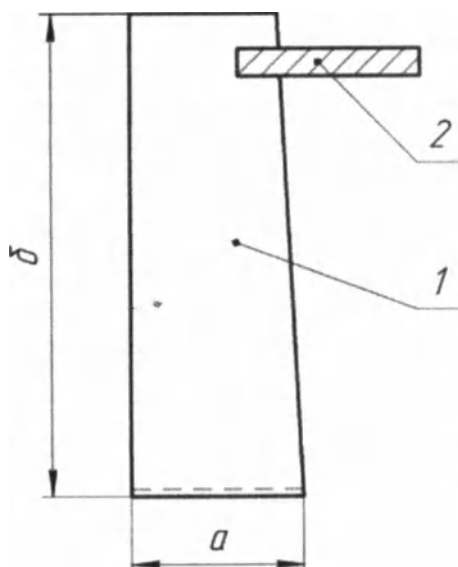

1-Полотно, 2-Липкий край

Рисунок А.10 - Бахила операционная (Варианты исполнения: с/без липкого края, исполнения по размерам в таблице А.13)

Таблица А.13

Обозначение	а, см	б, см
В 001	30	15
В 002	30	20
В 003	30	22
В 004	30	25
В 005	30	30
В 006	30	35
В 007	30	36
В 008	30	40
В 009	30	45
В 010	30	50
В 011	30	55
В 012	30	60
В 013	30	65
В 014	30	70
В 015	30	75
В 016	30	80
В 017	30	90
В 018	30	100
В 019	30	120

Обозначение	а, см	б, см
В 020	35	15
В 021	35	20
В 022	35	22
В 023	35	25
В 024	35	30
В 025	35	35
В 026	35	36
В 027	35	40
В 028	35	45
В 029	35	50
В 030	35	55
В 031	35	60
В 032	35	65
В 033	35	70
В 034	35	75
В 035	35	80
В 036	35	90
В 037	35	100
В 038	35	120

Обозначение	а, см	б, см
В 039	40	15
В 040	40	20
В 041	40	22
В 042	40	25
В 043	40	30
В 044	40	35
В 045	40	36
В 046	40	40
В 047	40	45
В 048	40	50
В 049	40	55
В 050	40	60
В 051	40	65
В 052	40	70
В 053	40	75
В 054	40	80
В 055	40	90
В 056	40	100
В 057	40	120


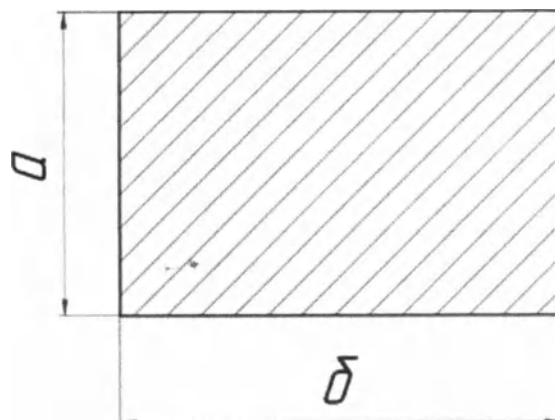


Рисунок А.11 – Операционная пленка (Варианты исполнения по размерам в таблице А.14)

Таблица А.14

Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см	Обозначение	а, см	б, см
ОР 001	10	10	ОР 038	20	27	ОР 075	27	60	ОР 112	37	47
ОР 002	10	12	ОР 039	20	30	ОР 076	30	30	ОР 113	37	50
ОР 003	10	15	ОР 040	20	33	ОР 077	30	33	ОР 114	37	60
ОР 004	10	17	ОР 041	20	35	ОР 078	30	35	ОР 115	37	70
ОР 005	10	20	ОР 042	20	37	ОР 079	30	37	ОР 116	37	80
ОР 006	10	22	ОР 043	20	40	ОР 080	30	40	ОР 117	40	40
ОР 007	10	25	ОР 044	22	22	ОР 081	30	42	ОР 118	40	42
ОР 008	10	27	ОР 045	22	25	ОР 082	30	45	ОР 119	40	45
ОР 009	10	30	ОР 046	22	27	ОР 083	30	47	ОР 120	40	47
ОР 010	12	12	ОР 047	22	30	ОР 084	30	50	ОР 121	40	50
ОР 011	12	15	ОР 048	22	33	ОР 085	30	60	ОР 122	40	60
ОР 012	12	17	ОР 049	22	35	ОР 086	30	70	ОР 123	40	70
ОР 013	12	20	ОР 050	22	37	ОР 087	33	33	ОР 124	40	80
ОР 014	12	22	ОР 051	22	40	ОР 088	33	35	ОР 125	42	42
ОР 015	12	25	ОР 052	25	25	ОР 089	33	37	ОР 126	42	45
ОР 016	12	27	ОР 053	25	27	ОР 090	33	40	ОР 127	42	47
ОР 017	12	30	ОР 054	25	30	ОР 091	33	42	ОР 128	42	50
ОР 018	15	15	ОР 055	25	33	ОР 092	33	45	ОР 129	42	60
ОР 019	15	17	ОР 056	25	35	ОР 093	33	47	ОР 130	42	70
ОР 020	15	20	ОР 057	25	37	ОР 094	33	50	ОР 131	42	80
ОР 021	15	22	ОР 058	25	40	ОР 095	33	60	ОР 132	45	45
ОР 022	15	25	ОР 059	25	42	ОР 096	33	70	ОР 133	45	47
ОР 023	15	27	ОР 060	25	45	ОР 097	33	80	ОР 134	45	50
ОР 024	15	30	ОР 061	25	47	ОР 098	35	35	ОР 135	45	60
ОР 025	17	17	ОР 062	25	50	ОР 099	35	37	ОР 136	45	70
ОР 026	17	20	ОР 063	25	60	ОР 100	35	40	ОР 137	45	80
ОР 027	17	22	ОР 064	25	70	ОР 101	35	42	ОР 138	47	47
ОР 028	17	25	ОР 065	27	27	ОР 102	35	45	ОР 139	47	50
ОР 029	17	27	ОР 066	27	30	ОР 103	35	47	ОР 140	47	60
ОР 030	17	30	ОР 067	27	33	ОР 104	35	50	ОР 141	47	70
ОР 031	17	33	ОР 068	27	35	ОР 105	35	60	ОР 142	47	80
ОР 032	17	35	ОР 069	27	37	ОР 106	35	70	ОР 143	50	50
ОР 033	17	37	ОР 070	27	40	ОР 107	35	80	ОР 144	50	60
ОР 034	17	40	ОР 071	27	42	ОР 108	37	37	ОР 145	50	70
ОР 035	20	20	ОР 072	27	45	ОР 109	37	40	ОР 146	50	80
ОР 036	20	22	ОР 073	27	47	ОР 110	37	42	ОР 147	55	70
ОР 037	20	25	ОР 074	27	50	ОР 111	37	45	ОР 148	60	80

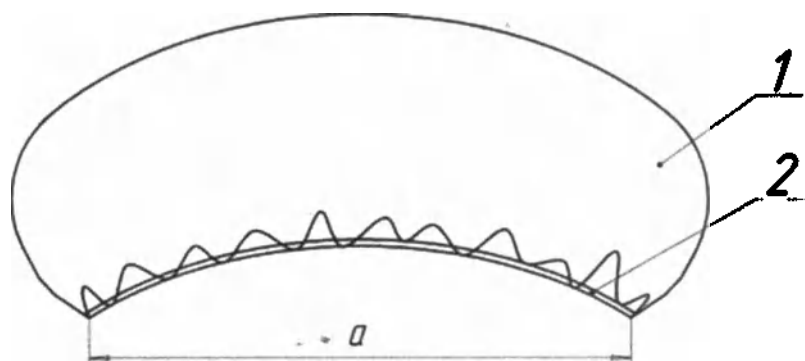


1-Полотно, 2-Резинка

Рисунок А.12 – Чехол на аппаратуру, тип А (Варианты исполнения по размерам в таблице А.15)

Таблица А.15

Обозначение	а, см
DA 001	10
DA 002	15
DA 003	20
DA 004	25
DA 005	30
DA 006	35
DA 007	40
DA 008	45
DA 009	50
DA 010	55
DA 011	60
DA 012	65
DA 013	70
DA 014	75
DA 015	80
DA 016	85
DA 017	90
DA 018	95
DA 019	100
DA 020	110
DA 021	120

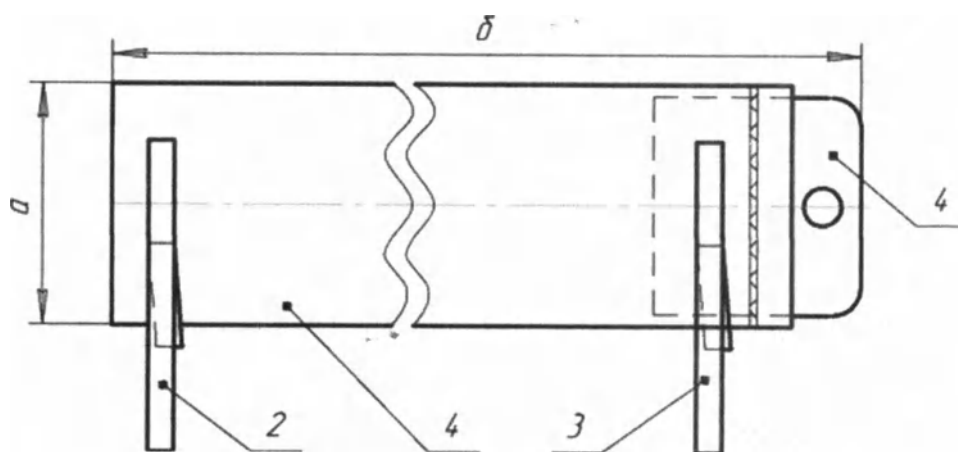

1-Рукав, 2, 3-Липкий край, 4-Держатель

Рисунок А.13 – Чехол на аппаратуру, тип В (Варианты исполнения: с/без держателя, с/без липкого края, исполнения по размерам в таблице А.16)


Таблица А.16

Обозначение	а, см	б, см
DB 001	10	100
DB 002	10	120
DB 003	10	140
DB 004	10	150
DB 005	10	160
DB 006	10	180
DB 007	10	200
DB 008	10	220
DB 009	10	240
DB 010	10	250
DB 011	10	300
DB 012	12	100
DB 013	12	120
DB 014	12	140
DB 015	12	150
DB 016	12	160
DB 017	12	180
DB 018	12	200
DB 019	12	220
DB 020	12	240
DB 021	12	250

Обозначение	а, см	б, см
DB 022	12	300
DB 023	14	100
DB 024	14	120
DB 025	14	140
DB 026	14	150
DB 027	14	160
DB 028	14	180
DB 029	14	200
DB 030	14	220
DB 031	14	240
DB 032	14	250
DB 033	14	300
DB 034	14	350
DB 035	15	100
DB 036	15	120
DB 037	15	140
DB 038	15	150
DB 039	15	160
DB 040	15	180
DB 041	15	200
DB 042	15	220

Обозначение	а, см	б, см
DB 043	15	240
DB 044	15	250
DB 045	15	300
DB 046	15	350
DB 047	16	100
DB 048	16	120
DB 049	16	140
DB 050	16	150
DB 051	16	160
DB 052	16	180
DB 053	16	200
DB 054	16	220
DB 055	16	240
DB 056	16	250
DB 057	16	300
DB 058	16	350
DB 059	18	100
DB 060	18	120
DB 061	18	140
DB 062	18	150
DB 063	18	160


Обозначение	а, см	б, см
DB 065	18	200
DB 066	18	220
DB 067	18	240
DB 068	18	250
DB 069	18	300
DB 070	18	350
DB 071	20	100
DB 072	20	120
DB 073	20	140
DB 074	20	150
DB 075	20	160
DB 076	20	180
DB 077	20	200
DB 078	20	220
DB 079	20	240
DB 080	20	250
DB 081	20	300
DB 082	20	350

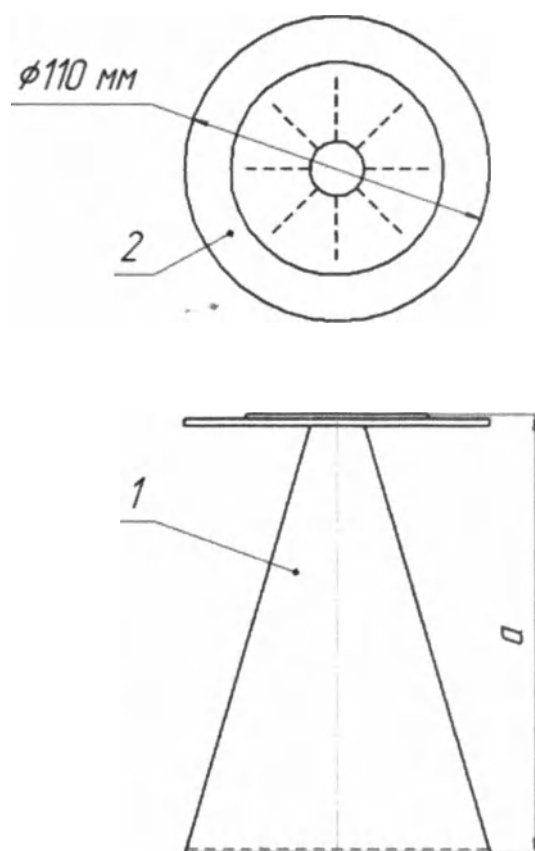

1-Рукав, 2-Фланец

Рисунок А.14 –Чехол на аппаратуру, тип С (Варианты исполнения по размерам в таблице А.17)
Таблица А.17

Обозначение	а, см
DC 001	10
DC 002	11
DC 003	12
DC 004	13
DC 005	14
DC 006	15
DC 007	16
DC 008	18
DC 009	20
DC 010	25

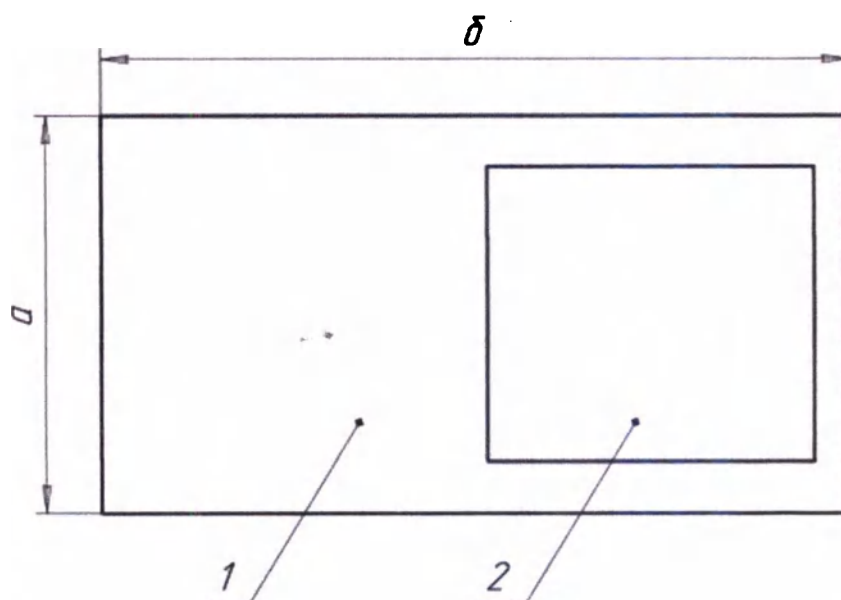

1-Рукав, 2-Впитывающая зона

Рисунок А.15 – Чехол на инструментальный стол (Варианты исполнения: с/без впитывающей зоны исполнения по размерам в таблице А.18)


Таблица А.18

Обозначение	а, см	б, см
CH 001	40	50
CH 002	40	60
CH 003	40	70
CH 004	40	75
CH 005	40	80
CH 006	40	90
CH 007	40	100
CH 008	50	50
CH 009	50	60
CH 010	50	70
CH 011	50	75
CH 012	50	80
CH 013	50	90
CH 014	50	100
CH 015	60	70

Обозначение	а, см	б, см
CH 016	60	75
CH 017	60	80
CH 018	60	90
CH 019	60	100
CH 020	60	110
CH 021	60	120
CH 022	60	130
CH 023	60	145
CH 024	70	70
CH 025	70	75
CH 026	70	80
CH 027	70	90
CH 028	70	100
CH 029	70	110
CH 030	70	120

Обозначение	а, см	б, см
CH 031	70	130
CH 032	70	145
CH 033	80	80
CH 034	80	90
CH 035	80	100
CH 036	80	110
CH 037	80	120
CH 038	80	130
CH 039	80	145
CH 040	80	150
CH 041	80	175
CH 042	90	90
CH 043	90	100
CH 044	90	110
CH 045	90	120

Обозначение	а, см	б, см
CH 046	90	130
CH 047	90	145
CH 048	90	150
CH 049	90	175
CH 050	90	200
CH 051	100	100
CH 052	100	110
CH 053	100	120
CH 054	100	130
CH 055	100	145
CH 056	100	150
CH 057	100	175
CH 058	100	200
CH 059	110	180
CH 060	120	200

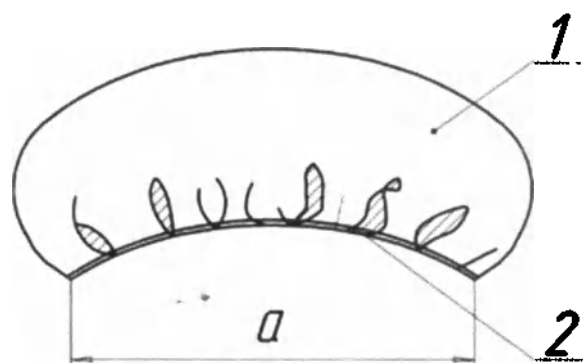


1-Полотно, 2-Резинка

Рисунок А.16 – Шапочка, тип А (Варианты исполнения по размерам в таблице А.19)

Таблица А.19

Обозначение	а, мм
А1	495
А2	510
А3	520

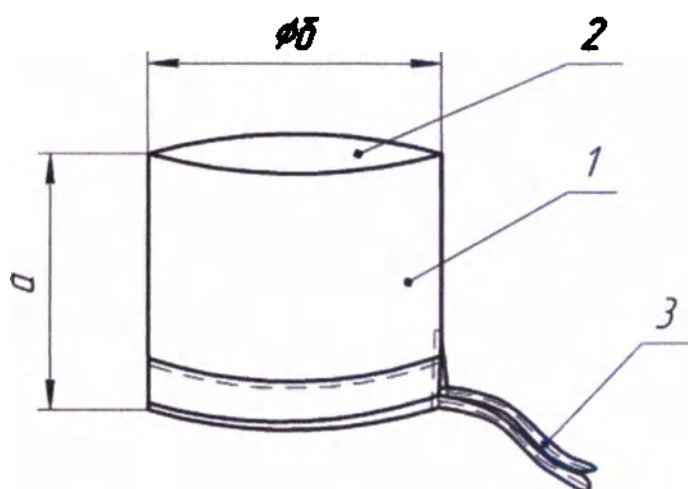


1-Полотно, 2-Дно, 3-Завязки

Рисунок А.17 – Шапочка, тип В (Варианты исполнения по размерам в таблице А.20)

Таблица А.20

Обозначение	а, мм	б, мм
В1	160	170
В2	180	180
В3	200	190
В4	220	200

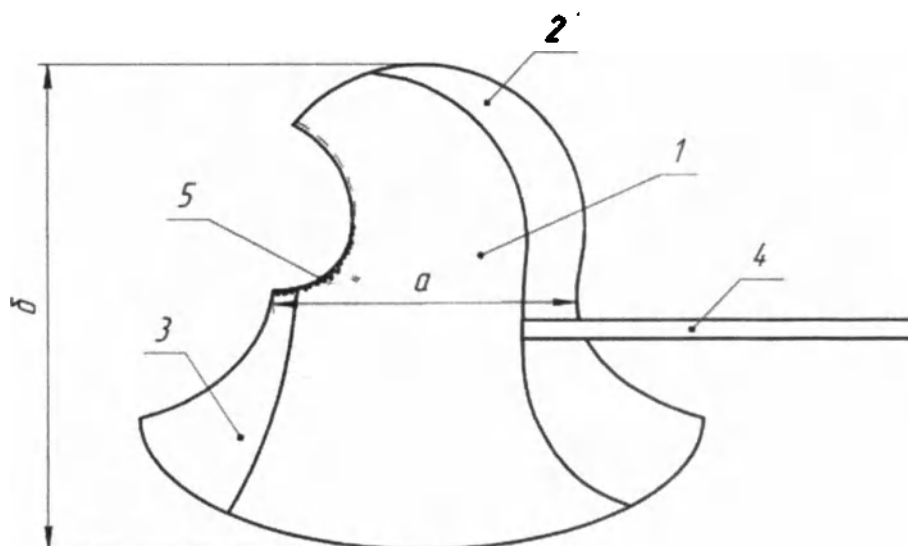

1-Бок, 2-Задник, 3-Перед, 4-Завязки, 5-резинка

Рисунок А.18 – Шапочка, тип С (Варианты исполнения по размерам в таблице А.21)

Таблица А.21

Обозначение	а, мм	б, мм
С1	310	520
С2	330	530
С3	340	540

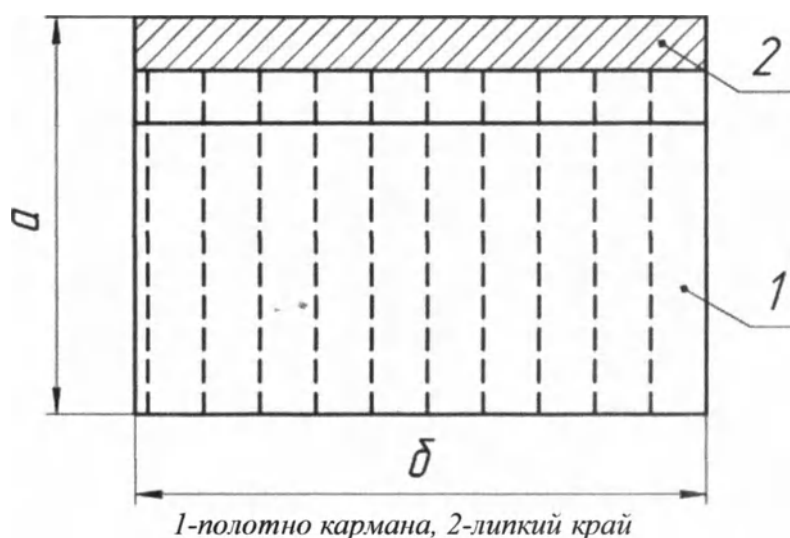


Рисунок А.19 - Карман-приемник (Варианты исполнения: количество секций кармана: 1, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 или 10, размеры в таблице А.22)

Таблица А.22

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 001	20	30
КР 002	25	30
КР 003	30	30
КР 004	35	30
КР 005	40	30
КР 006	45	30
КР 007	50	30
КР 008	20	35
КР 009	25	35
КР 010	30	35
КР 011	35	35
КР 012	40	35
КР 013	45	35
КР 014	50	35
КР 015	55	35
КР 016	60	35
КР 017	70	35
КР 018	35	37,5
КР 019	40	38
КР 020	20	40
КР 021	25	40
КР 022	30	40
КР 023	35	40
КР 024	40	40
КР 025	45	40
КР 026	50	40
КР 027	55	40
КР 028	60	40
КР 029	70	40

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 030	37,5	43
КР 031	20	45
КР 032	25	45
КР 033	30	45
КР 034	35	45
КР 035	37	45
КР 036	40	45
КР 037	45	45
КР 038	50	45
КР 039	55	45
КР 040	60	45
КР 041	70	45
КР 042	22,5	47
КР 043	20	50
КР 044	25	50
КР 045	30	50
КР 046	32	50
КР 047	35	50
КР 048	37,5	50
КР 049	40	50
КР 050	45	50
КР 051	50	50
КР 052	55	50
КР 053	60	50
КР 054	70	50
КР 055	20	55
КР 056	25	55
КР 057	30	55
КР 058	35	55

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 059	40	55
КР 060	45	55
КР 061	50	55
КР 062	55	55
КР 063	60	55
КР 064	70	55
КР 065	20	60
КР 066	25	60
КР 067	30	60
КР 068	35	60
КР 069	40	60
КР 070	45	60
КР 071	50	60
КР 072	55	60
КР 073	60	60
КР 074	70	60
КР 075	20	70
КР 076	25	70
КР 077	30	70
КР 078	35	70
КР 079	40	70
КР 080	45	70
КР 081	50	70
КР 082	55	70
КР 083	60	70
КР 084	70	70
КР 085	37,5	72
КР 086	20	80
КР 087	25	80

Обоз- начение	а, см	б, см
КР 088	30	80
КР 089	35	80
КР 090	40	80
КР 091	45	80
КР 092	50	80
КР 093	55	80
КР 094	60	80
КР 095	70	80
КР 096	20	90
КР 097	25	90
КР 098	30	90
КР 099	35	90
КР 100	40	90
КР 101	45	90
КР 102	50	90
КР 103	55	90
КР 104	60	90
КР 105	70	90
КР 106	40	100
КР 107	45	100
КР 108	50	100
КР 109	55	100
КР 110	60	100
КР 111	70	100




Рисунок А.20 – Мешок (Варианты исполнения по размерам в таблице А.23)

Таблица А.23

Обозна- чение	а, см	б, см
М 001	40	40
М 002	40	45
М 003	40	50
М 004	40	55
М 005	40	60
М 006	40	65
М 007	40	70
М 008	40	75
М 009	40	80
М 010	45	45
М 011	45	50
М 012	45	55
М 013	45	60
М 014	45	65
М 015	45	70
М 016	45	75
М 017	45	80

Обозна- чение	а, см	б, см
М 018	50	50
М 019	50	55
М 020	50	60
М 021	50	65
М 022	50	70
М 023	50	75
М 024	50	80
М 025	55	55
М 026	55	60
М 027	55	65
М 028	55	70
М 029	55	75
М 030	55	80
М 031	60	60
М 032	60	65
М 033	60	70
М 034	60	75

Обозна- чение	а, см	б, см
М 035	60	80
М 036	60	90
М 037	60	100
М 038	70	70
М 039	70	75
М 040	70	80
М 041	70	90
М 042	70	100
М 043	70	110
М 044	70	120
М 045	80	80
М 046	80	90
М 047	80	100
М 048	80	110
М 049	80	120
М 050	90	90
М 051	90	120

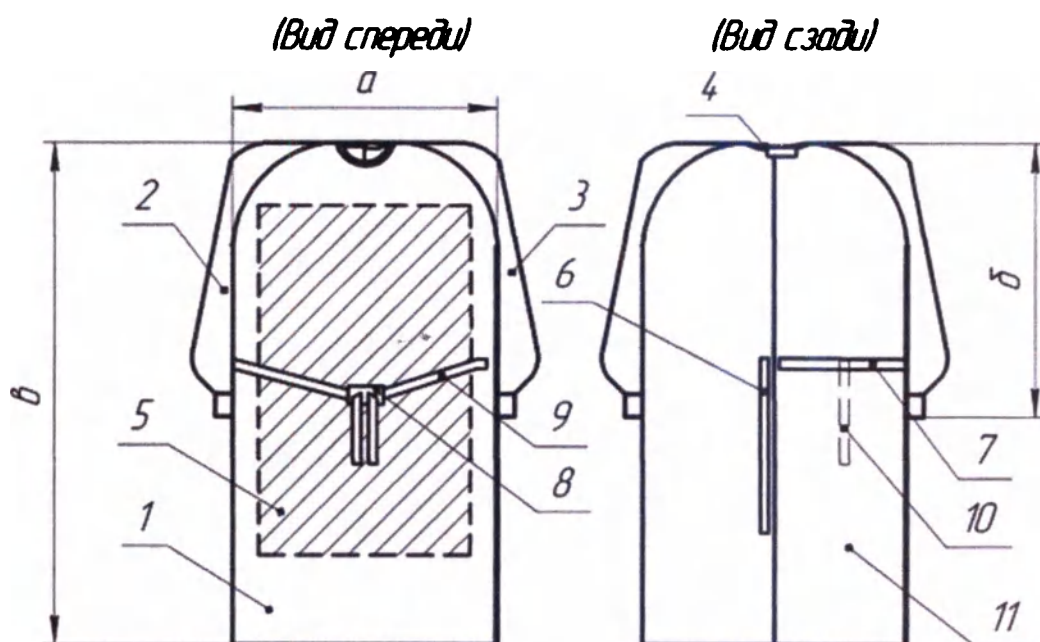

1-Полочка, 2,3-Рукава, 4-Горловина, 5-Дополнительная зона, 6,7,8,9,10-Завязки, 8-Барьер, 11-Спинка

Рисунок А.21– Халат хирургический (Варианты исполнения: горловина на завязках или на застёжке, с/без дополнительной зоны, с/без барьера, рукава на резинке или на манжете; исполнения по размерам в таблице А.24)

Таблица А.24


Обозначение	в, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды	Обозначение	в, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды
G44-1.0	1000	710	760	44 (42 – 44)	G46-1.0	1000	730	780	46 (44 – 46)
G44-1.1	1100				G46-1.1	1100			
G44-1.2	1200				G46-1.2	1200			
G44-1.3	1300				G46-1.3	1300			
G44-1.4	1400				G46-1.4	1400			
G44-1.5	1500				G46-1.5	1500			
G44-1.6	1600				G46-1.6	1600			
G48-1.0	1000	750	800	48 (46 – 48)	G50-1.0	1000	770	825	50 (48 – 50)
G48-1.1	1100				G50-1.1	1100			
G48-1.2	1200				G50-1.2	1200			
G48-1.3	1300				G50-1.3	1300			
G48-1.4	1400				G50-1.4	1400			
G48-1.5	1500				G50-1.5	1500			
G48-1.6	1600				G50-1.6	1600			
G52-1.0	1000	790	850	52 (50 – 52)	G54-1.0	1000	810	870	54 (52 – 54)
G52-1.1	1100				G54-1.1	1100			
G52-1.2	1200				G54-1.2	1200			
G52-1.3	1300				G54-1.3	1300			
G52-1.4	1400				G54-1.4	1400			
G52-1.5	1520				G54-1.5	1540			
G52-1.6	1600				G54-1.6	1600			
G56-1.0	1000	830	885	56 (54 – 56)	G58-1.0	1000	850	900	58 (56 – 58)
G56-1.1	1100				G58-1.1	1100			
G56-1.2	1200				G58-1.2	1200			
G56-1.3	1300				G58-1.3	1300			
G56-1.4	1400				G58-1.4	1400			
G56-1.5	1520				G58-1.5	1540			
G56-1.6	1600				G58-1.6	1600			
G60-1.0	1000	870	910	60 (58 – 60)	G62-1.0	1000	890	920	62 (60 – 62)

Таблица А.24

Обозначение	в, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды	Обозначение	в, мм	а, мм	б, мм	Размер одежды
G60-1.1	1100				G62-1.1	1100			
G60-1.2	1200				G62-1.2	1200			
G60-1.3	1300				G62-1.3	1300			
G60-1.4	1400				G62-1.4	1400			
G60-1.5	1520				G62-1.5	1540			
G60-1.6	1600				G62-1.6	1600			
G64-1.0	1000	910	930	64 (62 – 64)	G66-1.0	1000	930	940	66 (64 – 66)
G64-1.1	1100				G66-1.1	1100			
G64-1.2	1200				G66-1.2	1200			
G64-1.3	1300				G66-1.3	1300			
G64-1.4	1400				G66-1.4	1400			
G64-1.5	1520				G66-1.5	1540			
G64-1.6	1600				G66-1.6	1600			

Исполнение-на завязках

Исполнение-цельнокроеный

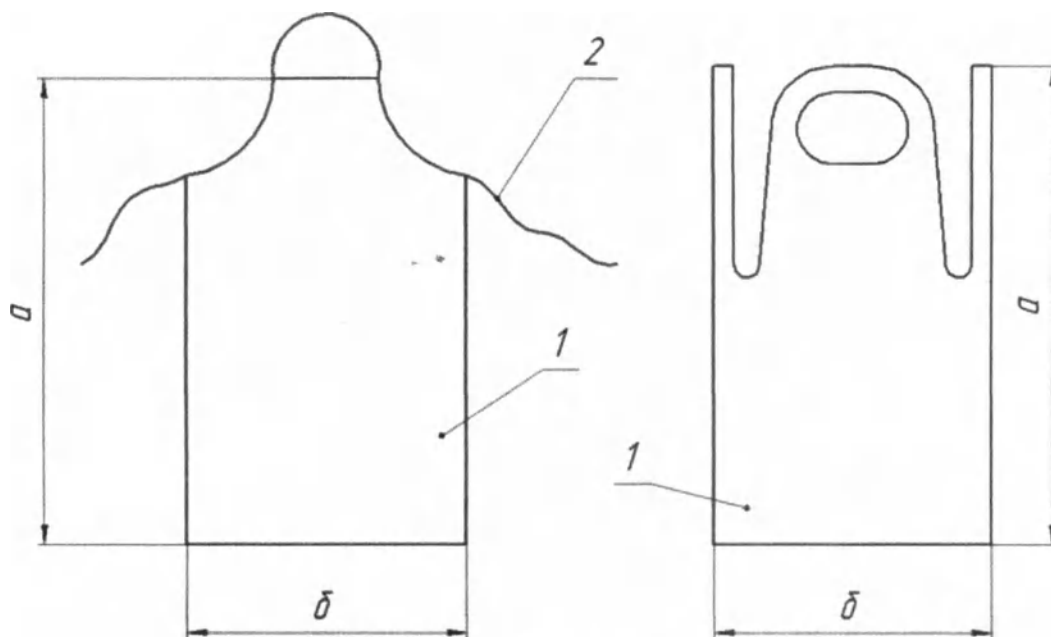


1-Полотно, 2-Завязки

Рисунок А.22 – Фартук (Варианты исполнения: на завязках или цельнокроеный, исполнения по размерам в таблице А.25)


Таблица А.25

Обозначение	а, мм	б, мм	Обозначение	а, мм	б, мм
F01	700	1000	F13	900	1000
F02		1100	F14		1100
F03		1200	F15		1200
F04		1300	F16		1300
F05		1400	F17		1400
F06		1500	F18		1500
F07	800	1000	F19	1000	1000
F08		1100	F20		1100
F09		1200	F21		1200
F10		1300	F22		1300
F11		1400	F23		1400
F12		1500	F24		1500

Исполнение на завязках

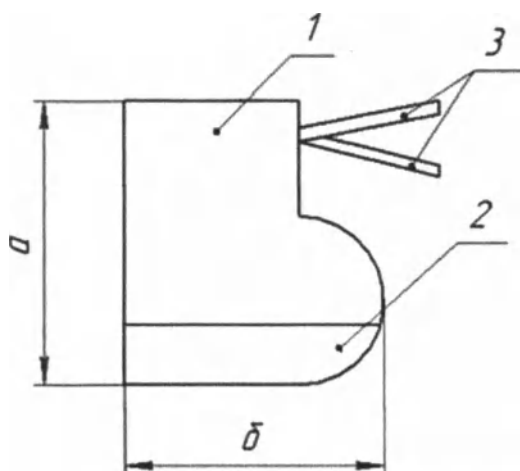

Исполнение на резинке

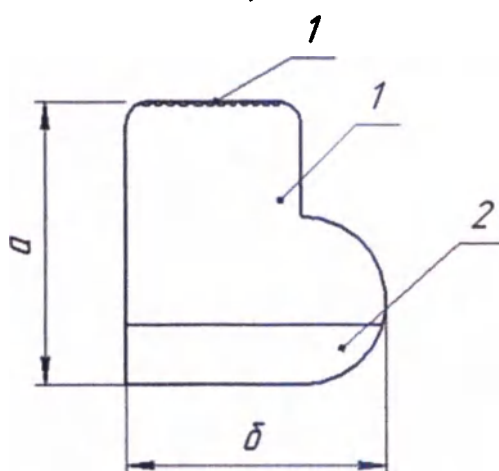

1-Полотно, 2-Дополнительная подошва, 3-Завязки, 4-Резинка

Рисунок А.23 – Бахилы (Варианты исполнения: с/без дополнительной подошвы, на резинке или на завязках, исполнения по размерам в таблице А.26)

Таблица А.26 – Размеры бахил

Обозначение	а, мм	б, мм	Обозначение	а, мм	б, мм
В01	150	350	В12	150	400
В02	200		В13	200	
В03	220		В14	220	
В04	250		В15	250	
В05	300		В16	300	
В06	360		В17	360	
В07	400		В18	400	
В08	450		В19	450	
В09	500		В20	500	
В10	550		В21	550	
В11	600		В22	600	



Рисунок А.24 – Наручавники (Варианты исполнения: на манжете или на резинке исполнения по размерам в таблице А.27)

Таблица А.27

Обозначение	а, мм	б, мм
N01	260	300
N02	260	500
N03	260	600

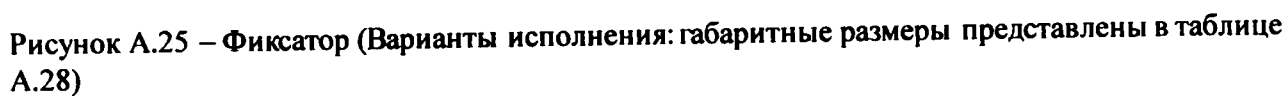


Таблица А.28

Обозна чение	а, см	б, см
FP 001	1,5	10
FP 002	1,5	15
FP 003	1,5	20
FP 004	1,5	25
FP 005	1,5	30
FP 006	1,5	35
FP 007	1,5	40
FP 008	1,5	45
FP 009	1,5	50
FP 010	2	10
FP 011	2	15
FP 012	2	20
FP 013	2	25
FP 014	2	30
FP 015	2	35
FP 016	2	40

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

62 листов

Генеральный директор ООО «Медицина»

(Рахматуллина Ю.А.)

