


Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО «Зеленая дубрава»

 Патеева О.Ю.

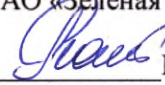

«13» июля 2022 г.

Фотографическое изображение

медицинского изделия

Губка гемостатическая коллагеновая с серебром по ТУ

21.20.24-029-48783520-2017

1 шт.

Стерильно

**ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ
КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ**



размер 10,0 мм × 10,0 мм × 7,0 мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве упаковки

Хранить при температуре +5 °С до +25 °С

в сухом, защищённом от света месте

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Изготовитель: ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE | R



1 шт.

Стерильно

**ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ
КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ**

размер 25,0 мм × 50,0 мм × 7,0 мм

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия: см. на шве упаковки

Хранить при температуре +5 °С до +25 °С

в сухом, защищённом от света месте

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Изготовитель: ЗАО «Зеленая дубрава»



STERILE | R 



1 шт

Стерильно



**Губка гемостатическая
коллагеновая с серебром**

размер 50,0 мм × 50,0 мм × 7,0 мм

Срок годности:

3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия:

см. на шве упаковки

Хранить при температуре +5 °С до +25 °С

в сухом, защищённом от света месте

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Изготовитель: ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R





1 шт

Стерильно



**Губка гемостатическая
коллагеновая с серебром**

размер 90,0 мм x 90,0 мм x 7,0 мм

Срок годности:

3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия:

см. на шве упаковки

Хранить при температуре +5 °C до +25 °C

в сухом, защищённом от света месте

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Изготовитель: ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



1 шт

Стерильно



**Губка гемостатическая
коллагеновая с серебром**

размер 97,0 мм x 97,0 мм x 7,0 мм

Срок годности:

3 года с даты изготовления

Дата изготовления/серия:

см. на шве упаковки

Хранить при температуре +5 °С до +25 °С
в сухом, защищённом от света месте

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Изготовитель: ЗАО «Зеленая дубрава»

STERILE R



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ

РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТЕРИЛЬНО

ag+

- Остановка кровотечений
- Антисептическая защита раны
- Влажное заживление раны
- Защита раны от воздействия внешней среды

10×10×7 мм

10 штук




ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ

Состав: коллагена р-р – 95,5%, протаргол – 2,0%, аминокaproновая к-та – 2,0%, борная кислота – 0,5%.

Показания к применению: для остановки капиллярных кровотечений, кровотечений при повреждении кожных покровов и слизистых оболочек, при кровотечениях из носа, при стоматологических вмешательствах, для закрытия ран любой этиологии с умеренным уровнем экссудации от воздействия внешней среды и обеспечения влажного заживления и регенерации тканей. **Особые указания:** при артериальных и венозных кровотечениях используется исключительно в качестве вспомогательного средства в дополнение к основным общим гемостатическим методам. **Противопоказания к применению:** повышенная чувствительность к компонентам изделия. **Побочные действия:** возможны аллергические реакции на компоненты изделия.

Срок годности: 3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:

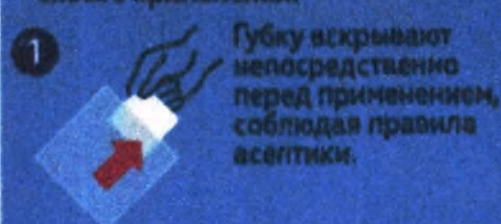

Губку вскрывают непосредственно перед применением, соблюдая правила асептики.



Накладывают на раневую поверхность и прижимают в течение 2–3 минут или плотно тампонируют кровоточащее место. После пропитывания кровью Губка плотно прилегает к кровоточащей поверхности. Если кровотечение не остановилось, можно положить второй слой Губки. После остановки кровотечения Губку можно удалить.



Для предотвращения рецидива кровотечения и для изоляции раны от внешней среды Губку оставляют в качестве раневого покрытия. При необходимости Губку дополнительно фиксируют лейкопластырем или марлевой повязкой.

! Смену повязки проводят не реже одного раза в сутки.

Размер используемой Губки выбирают в соответствии с размером кровоточащей поверхности.

Варианты исполнения: 10×10×7 мм, 25×50×7 мм, 50×50×7 мм, 90×90×7 мм, 97×97×7 мм.

Утилизация: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года.

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии: ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru
Больше информации на сайте www.mazi.ru



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ



РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТЕРИЛЬНО

ag+

- Остановка кровотечений
- Антисептическая защита раны
- Влажное заживление раны
- Защита раны от воздействия внешней среды

25×50×7 мм

1 штука



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ

Состав: коллагена р-р – 95,5%, протаргол – 2,0%, аминокапроновая к-та – 2,0%, борная кислота – 0,5%.

Показания к применению: для остановки капиллярных кровотечений, кровотечений при повреждении кожных покровов и слизистых оболочек, при кровотечениях из носа, при стоматологических вмешательствах, для закрытия ран любой этиологии с умеренным уровнем экссудации от воздействия внешней среды и обеспечения влажного заживления и регенерации тканей. **Особые указания:** при артериальных и венозных кровотечениях используется исключительно в качестве вспомогательного средства в дополнение к основным общим гемостатическим методам. **Противопоказания к применению:** повышенная чувствительность к компонентам изделия. **Побочные действия:** возможны аллергические реакции на компоненты изделия.

Срок годности: 3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:



1 Губку вскрывают непосредственно перед применением, соблюдая правила асептики.



2 Накладывают на раневую поверхность и прижимают в течение 2–3 минут или плотно тампонируют кровоточащее место. После пропитывания кровью Губка плотно прилегает к кровоточащей поверхности. Если кровотечение не остановилось, можно положить второй слой Губки. После остановки кровотечения Губку можно удалить.



3 Для предотвращения рецидива кровотечения и для изоляции раны от внешней среды Губку оставляют в качестве раннего покрытия. При необходимости Губку дополнительно фиксируют лейкопластырем или марлевой повязкой.

⚠ Смену повязки проводят не реже одного раза в сутки.
Размер используемой Губки выбирают в соответствии с размером кровоточащей поверхности.
Варианты исполнения: 10×10×7 мм, 25×50×7 мм, 50×50×7 мм, 90×90×7 мм, 97×97×7 мм.

Утилизация: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года.

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии: ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru
Больше информации на сайте www.mazi.ru



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ



РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТЕРИЛЬНО

ag+

- Остановка кровотечений
- Антисептическая защита раны
- Влажное заживление раны
- Защита раны от воздействия внешней среды

50×50×7 мм
1 штука



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ

Состав: коллагена р-р – 95,5%, протаргол – 2,0%, аминокaproновая к-та – 2,0%, борная кислота – 0,5%.

Показания к применению: для остановки капиллярных кровотечений, кровотечений при повреждении кожных покровов и слизистых оболочек, при кровотечениях из носа, при стоматологических вмешательствах, для закрытия ран любой этиологии с умеренным уровнем экссудации от воздействия внешней среды и обеспечения влажного заживления и регенерации тканей.

Особые указания: при артериальных и венозных кровотечениях используется исключительно в качестве вспомогательного средства в дополнение к основным общим гемостатическим методам.

Противопоказания к применению: повышенная чувствительность к компонентам изделия.

Побочные действия: возможны аллергические реакции на компоненты изделия.

Срок годности: 3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:



Губку вскрывают непосредственно перед применением, соблюдая правила асептики.

Накладывают на раневую поверхность и прижимают в течение 2–3 минут или плотно тампонируют кровоточащее место. После пропитывания кровью Губка плотно прилегает к кровоточащей поверхности. Если кровотечение не остановилось, можно положить второй слой Губки. После остановки кровотечения Губку можно удалить.

Для предотвращения рецидива кровотечения и для изоляции раны от внешней среды Губку оставляют в качестве раневого покрытия. При необходимости Губку дополнительно фиксируют лейкопластырем или марлевой повязкой.

⚠ Смену повязки проводят не реже одного раза в сутки.

Размер используемой Губки выбирают в соответствии с размером кровоточащей поверхности.

Варианты исполнения: 10×10×7 мм, 25×50×7 мм, 50×50×7 мм, 90×90×7 мм, 97×97×7 мм.

Утилизация: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года.

ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищённом от света месте. Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru
Больше информации на сайте www.mazi.ru



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ



РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТЕРИЛЬНО

ag+

- Остановка кровотечений
- Антисептическая защита раны
- Влажное заживление раны
- Защита раны от воздействия внешней среды

90×90×7 мм
1 штука



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ

Состав: коллагена раствор – 95,5%, протаргол – 2,0%, аминокaproновая кислота – 2,0%, борная кислота – 0,5%.

Показания к применению: для остановки капиллярных кровотечений, кровотечений при повреждении кожных покровов и слизистых оболочек, при кровотечениях из носа, при стоматологических вмешательствах, для закрытия ран любой этиологии с умеренным уровнем экссудации от воздействия внешней среды и обеспечения влажного заживления и регенерации тканей.

Особые указания: при артериальных и венозных кровотечениях используется исключительно в качестве вспомогательного средства в дополнение к основным общим гемостатическим методам.

Противопоказания к применению: повышенная чувствительность к компонентам изделия.

Побочные действия: возможны аллергические реакции на компоненты изделия.

Срок годности: 3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:



Губку вскрывают непосредственно перед применением, соблюдая правила асептики.



Накладывают на раневую поверхность и прижимают в течение 2–3 минут или плотно тампонируют кровоточащее место. После пропитывания кровью Губка плотно прилегает к кровоточащей поверхности. Если кровотечение не остановилось, можно положить второй слой Губки. После остановки кровотечения Губку можно удалить.



Для предотвращения рецидива кровотечения и для изоляции раны от внешней среды Губку оставляют в качестве раневого покрытия. При необходимости Губку дополнительно фиксируют лейкопластырем или марлевой повязкой.



Смену повязки проводят не реже одного раза в сутки.

Размер используемой Губки выбирают в соответствии с размером кровоточащей поверхности.

Варианты исполнения: 10×10×7 мм, 25×50×7 мм, 50×50×7 мм, 90×90×7 мм, 97×97×7 мм.

Утилизация: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года. ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищенном от света месте. Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru

Больше информации на сайте www.mazi.ru



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ



РАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

СТЕРИЛЬНО

ag+

- Остановка кровотечений
- Антисептическая защита раны
- Влажное заживление раны
- Защита раны от воздействия внешней среды

97×97×7 мм
1 штука



ГУБКА ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ КОЛЛАГЕНОВАЯ С СЕРЕБРОМ

Состав: коллагена раствор – 95,5%, протаргол – 2,0%, аминокaproновая кислота – 2,0%, борная кислота – 0,5%.

Показания к применению: для остановки капиллярных кровотечений, кровотечений при повреждении кожных покровов и слизистых оболочек, при кровотечениях из носа, при стоматологических вмешательствах, для закрытия ран любой этиологии с умеренным уровнем экссудации от воздействия внешней среды и обеспечения влажного заживления и регенерации тканей.


Особые указания: при артериальных и венозных кровотечениях используется исключительно в качестве вспомогательного средства в дополнение к основным общим гемостатическим методам.

Противопоказания к применению: повышенная чувствительность к компонентам изделия.

Побочные действия: возможны аллергические реакции на компоненты изделия.

Срок годности: 3 года с даты изготовления. Не использовать по истечении срока годности.

Способ применения:

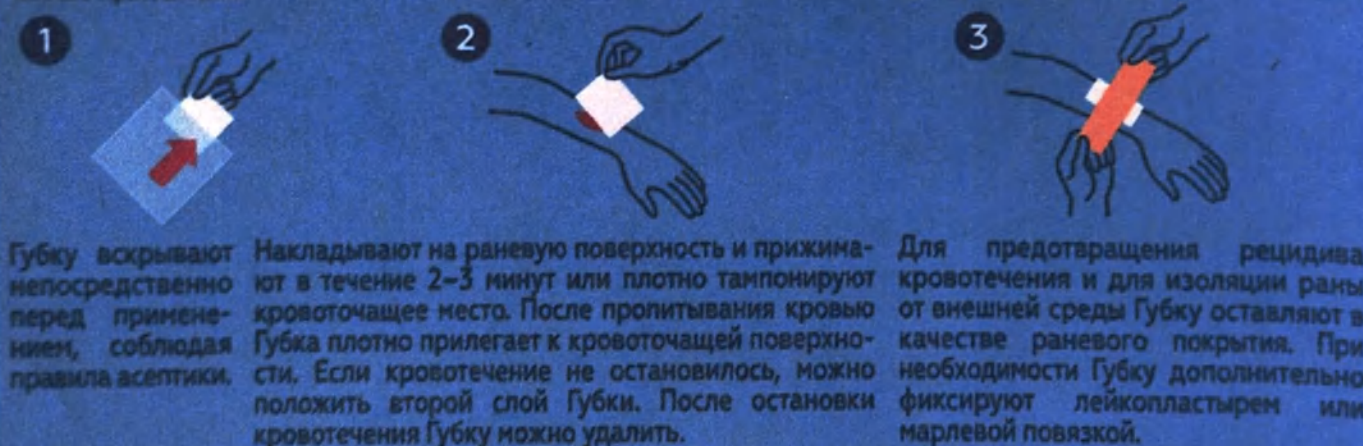

⚠ Смену повязки проводят не реже одного раза в сутки.
Размер используемой Губки выбирают в соответствии с размером кровоточащей поверхности.
Варианты исполнения: 10×10×7 мм, 25×50×7 мм, 50×50×7 мм, 90×90×7 мм, 97×97×7 мм.

Утилизация: см. инструкцию.

РУ № РЗН 2019/8687 от 26 июля 2019 года. ТУ 21.20.24-029-48783520-2017

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 °С до +25 °С в сухом, защищённом от света месте. Изготовлено на фармацевтическом заводе в соответствии с требованиями СМК.

Изготовитель / Организация, принимающая претензии:

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская область, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 151. Тел./факс: +7 (495) 993 99 95; e-mail: info@mazi.ru



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 17 листа(ов).

Генеральный директор

Иатеева О.Ю.

(подпись)



17 сентября 2022 года