

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

Усейнов Д.В.



10 февраля 2022 г.

**Фотографические изображения, данные о маркировке и упаковке
медицинского изделия**

“Дегидратирующий раствор Изопреп”

по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Содержание

1. Маркировка	3
2. Упаковка	14

1. Маркировка

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 31340-2013.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-067-89079081-2022, п.1.4.1 Маркировка первичной упаковки, п.1.4.2 Маркировка транспортной упаковки.

1.1 Дегидратирующий раствор Изопреп, 1 л

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л





IVD REF HP-IS-AL01 РУ № xxxxxx

«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп, 1 л



Состав: изопропанол, неионогенный ПАВ.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280/Использовать СИЗ;
P304+P340/При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах

+25°C



LOT xxxxxx

XX.XXXX

YY.YYYY

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.



Краткая инструкция:
Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:

1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп (смесь с водой дистиллированной или деионизованной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

Готов к использованию. Для профессионального применения.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.



www.biovitrum.ru



ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Litr N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.

Дегидратирующий раствор Изопреп, 1 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-AL01

Для профессионального применения.
Готов к использованию.



LOT xxxxxx

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № xxxxxx

«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____



+25°C






По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп, 2,5 л
Первичная упаковка: Канистра, 2,5 л



IVD REF HP-IS-AD25

Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022




ПУ № XX.XXXX

Дегидратирующий раствор Изопреп, 2,5 л

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C





www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:
Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:

1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп (смесь с водой дистиллированной или деионизованной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типа. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Состав: изопропанол, неионогенный ПАВ.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ. P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой. P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы. P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АБС. P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке. P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться:

ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.

ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп, 2,5 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-AD25

Для профессионального применения.
Готов к использованию.




Дегидратирующий раствор Изопреп, 2,5 л

LOT XXXXXX

MM.GGGG

MM.GGGG

ПУ № XXXXXX

+25°C



Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____




По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп, 5 л

Первичная упаковка: Канистра, 5 л



Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022



ПУ № XX.XXXX

Дегидратирующий раствор Изопреп, 5 л

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C

Краткая инструкция:
Протокол ночной проволки для вакуумных процессоров:
1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп (смесь с водой дистиллированной или деионизированной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проволке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типа. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проволки более 200 образцов - обязательно.

Состав: изопропанол, неионогенный ПАВ.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ, P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Uter N. building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп, 5 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-AL05

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп, 5 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX
+25°C
MM.GGGG
MM.GGGG
ПУ № XXXXXX

↑↑
☂

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп, 10 л
Первичная упаковка: Канистра, 10 л

BiVitrum

Готов к использованию. Для профессионального применения.
«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022



ПУ № XX.XXXX

IVD REF HP-IS-AL10

Дегидратирующий раствор Изопреп, 10 л

LOT XXXXXX

XX.XXXX
YY.YYYY



www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:

- Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:
1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
 2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп (смесь с водой дистиллированной или деионизованной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
 3. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
 4. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
 5. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
 6. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
 7. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
 8. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
 9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
 10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
 11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
 12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
 13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
 14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Состав: изопропанол, неионогенный ПАВ.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость; Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Дегидратирующий раствор Изопреп, 10 л Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-AL10

Для профессионального применения.
Готов к использованию.



«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022


Дегидратирующий раствор Изопреп, 10 л

LOT XXXXXX

MM.GGGG

MM.GGGG

ПУ № XXXXXX

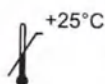

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

Масса нетто потребительской упаковки:



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп, 20 л

Первичная упаковка: Канистра, 20 л

BiVitrum

Готов к использованию. Для профессионального применения.

«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022



РУ № XX.XXXX

IVD REF HP-IS-AL20

Дегидратирующий раствор Изопреп, 20 л

LOT XXXXXX

XX.XXXX
YY.YYYY



www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:

Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:

1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп (смесь с водой дистиллированной или деионизованной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Состав: изопропанол, неионогенный ПАВ.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно! Промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А,

тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Дегидратирующий раствор Изопреп, 20 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-AL20

Для профессионального применения.
Готов к использованию.



«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп, 20 л

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

РУ № XXXXXX



Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

Масса нетто потребительской упаковки:



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

1.2 Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

Bi Vitrum
IVD REF HP-IS-BL01 PY № xxxxxx

«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 1 л



Состав: изопропанол, вода.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; R304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; R305+P351+P338: При попадании в глаза: Особой промывке глаз водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый ABC; R403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; R501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

+25°C

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Bi Vitrum

Краткая инструкция:
Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:
1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп плюс (смесь с водой дистиллированной или деионизованной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

Готов к использованию. Для профессионального применения.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-BL01

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

PY № xxxxxx

+25°C

↑↑

☂

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 2,5 л
Первичная упаковка: Канистра, 2,5 л

BiVitrum
IVD REF HP-IS-BD25

Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 2,5 л

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY
+25°C

Краткая инструкция:
Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:
1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп плюс (смесь с водой дистиллированной или деионизованной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Хранить в плотно закрытой упаковке, адали от источников нагрева, искр, открытого огня.

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.
Состав: изопропанол, вода.
Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.
Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

PU № XX.XXXX

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 2,5 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-BD25

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022
Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 2,5 л

LOT XXXXXX
MM.ГГГГ
MM.ГГГГ
PU № XXXXXX

+25°C

Кол-во штук: _____
Масса нетто: _____
Масса брутто: _____
Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 5 л
Первичная упаковка: Канистра, 5 л

BiVitrum

IVD REF HP-IS-BL05

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

www.biovitrum.ru

Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 5 л

Краткая инструкция:
Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:
1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп плюс (смесь с водой дистиллированной или деионизированной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru



РУ № XX.XXXX

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Состав: изопропанол, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 5 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-BL05

LOT XXXXXX

MM.GGGG

MM.GGGG

РУ № XXXXXX

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 5 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____





По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 10 л

Первичная упаковка: Канистра, 10 л

BiVitrum

Готов к использованию. Для профессионального применения.

«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022



ПУ № XX.XXXX

IVD REF HP-IS-BL10

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 10 л

LOT XXXXXX



XX.XXXX



YY.YYYY



www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:

Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:

1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп плюс (смесь с водой дистиллированной или деионизированной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Состав: изопропанол, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: выйдите на свежий воздух; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АВС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А,

тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru



Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 10 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-BL10

Для профессионального применения.
Готов к использованию.



«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 10 л

LOT XXXXXX




MM.GGG



MM.GGG

ПУ № XXXXXX

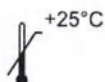

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

Масса нетто потребительской упаковки:



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru



Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 20 л
Первичная упаковка: Канистра, 20 л



IVD REF HP-IS-BL20

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

+25°C


www.biovitrum.ru

Готов к использованию. Для профессионального применения.

«Дегидратирующий раствор Изопреп»
по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 20 л

Краткая инструкция:
Протокол ночной проводки для вакуумных процессоров:
1. Формалин 10% забуференный - 3 ч, д/в, 45°C
2. 50%-ный водный раствор Дегидратирующий раствор Изопреп плюс (смесь с водой дистиллированной или деионизованной 1:1 по объему) - 1 ч, д/в, 45°C
3. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
4. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
5. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
6. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
7. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
8. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс - 1 ч, д/в, 45°C
9. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
10. Ксилол - 1 ч, д/в, 45°C
11. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
12. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
13. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C
14. Парафин - 1,5 ч, д/в, 62°C



PY № XX.XXXX

Внимание: Рекомендуемая толщина образца материала до 3-4 мм. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. Увеличение времени пребывания в Изопрепе свыше указанного не влияет на качество препаратов. Необходимо менять Изопреп по мере загрязнения, но после проводки более 200 образцов - обязательно.

Состав: изопропанол, вода.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение. Меры по предупреждению опасности: P210: Беречь от источников огня. Не курить. P280: Использовать СИЗ: P304+P340: При вдыхании: выдохнуть воздух, покой. P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый АБС; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 20 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HP-IS-BL20

LOT XXXXXX
MM.GGGG
MM.GGGG
PY № XXXXXX

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Дегидратирующий раствор Изопреп» по ТУ 21.20.23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 20 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____



По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

2. Упаковка

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-067-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-067-89079081-2022 п.1.5.

Допускается использование бутылки 1 л с рельефным логотипом "BioVitrum".

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом, связаны с разными производителями данной упаковки и относятся к одному варианту исполнения изделия.

2.1 Фото 1. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп, 1 л, лицевая сторона



Фото 2. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп, 1 л, оборотная сторона



Фото 3. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп, 2,5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2

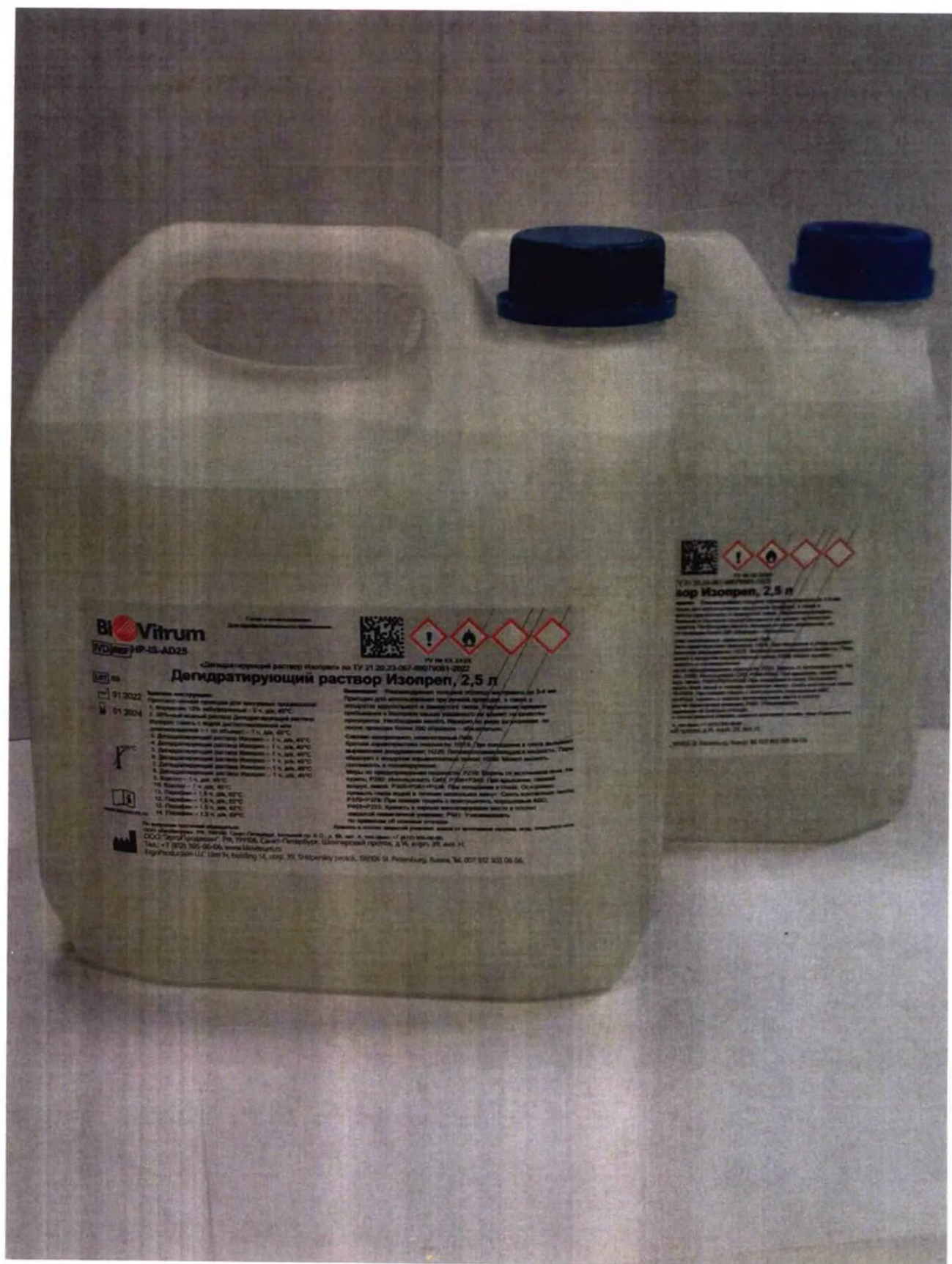


Фото 4. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп, 5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 5. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп, 10 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2


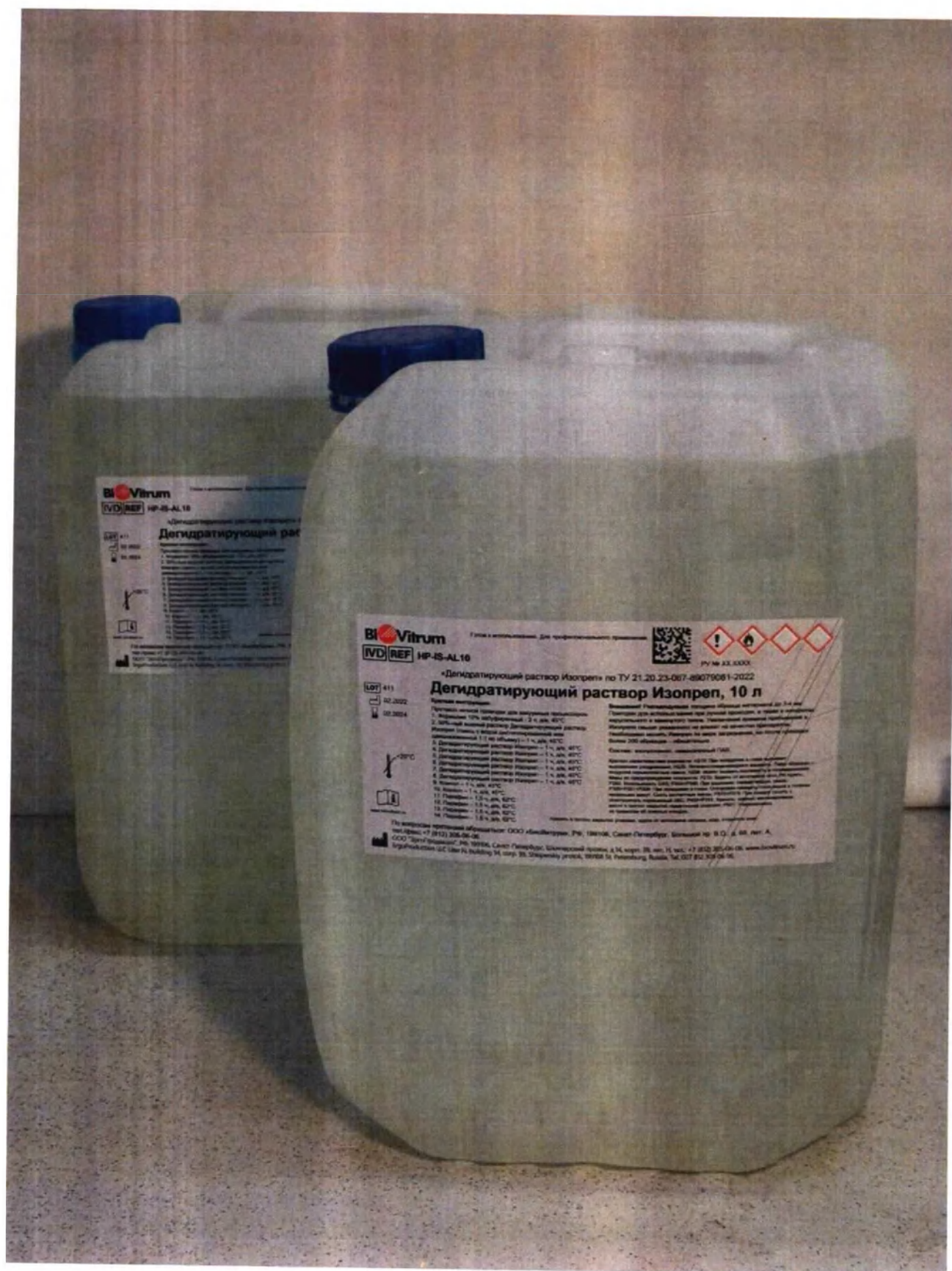


Фото 6. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп, 20 л

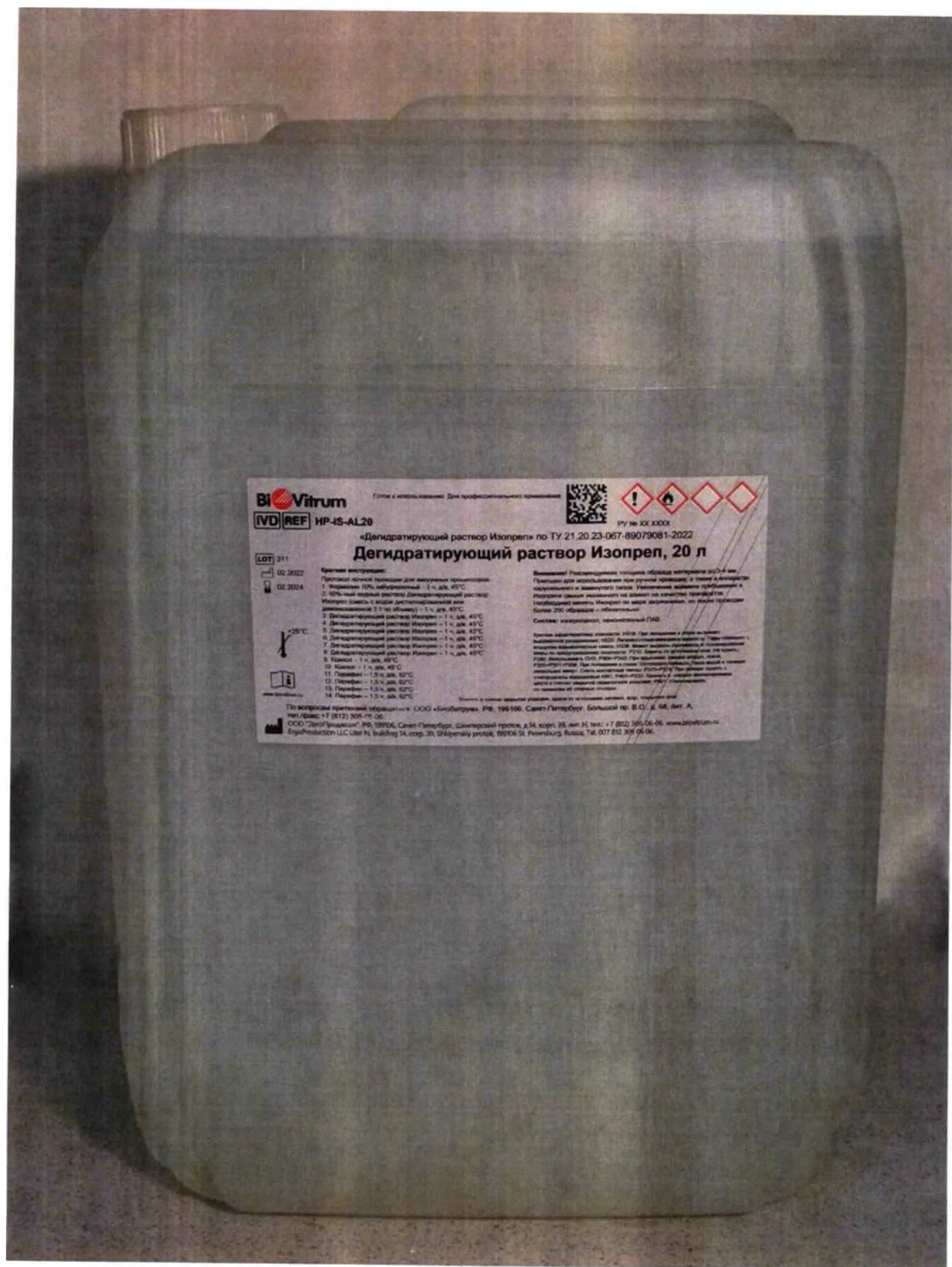

2.2 Фото 7. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 1 л, лицевая сторона




Фото 8. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 1 л, обратная сторона



Фото 9. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 2,5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 10. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2

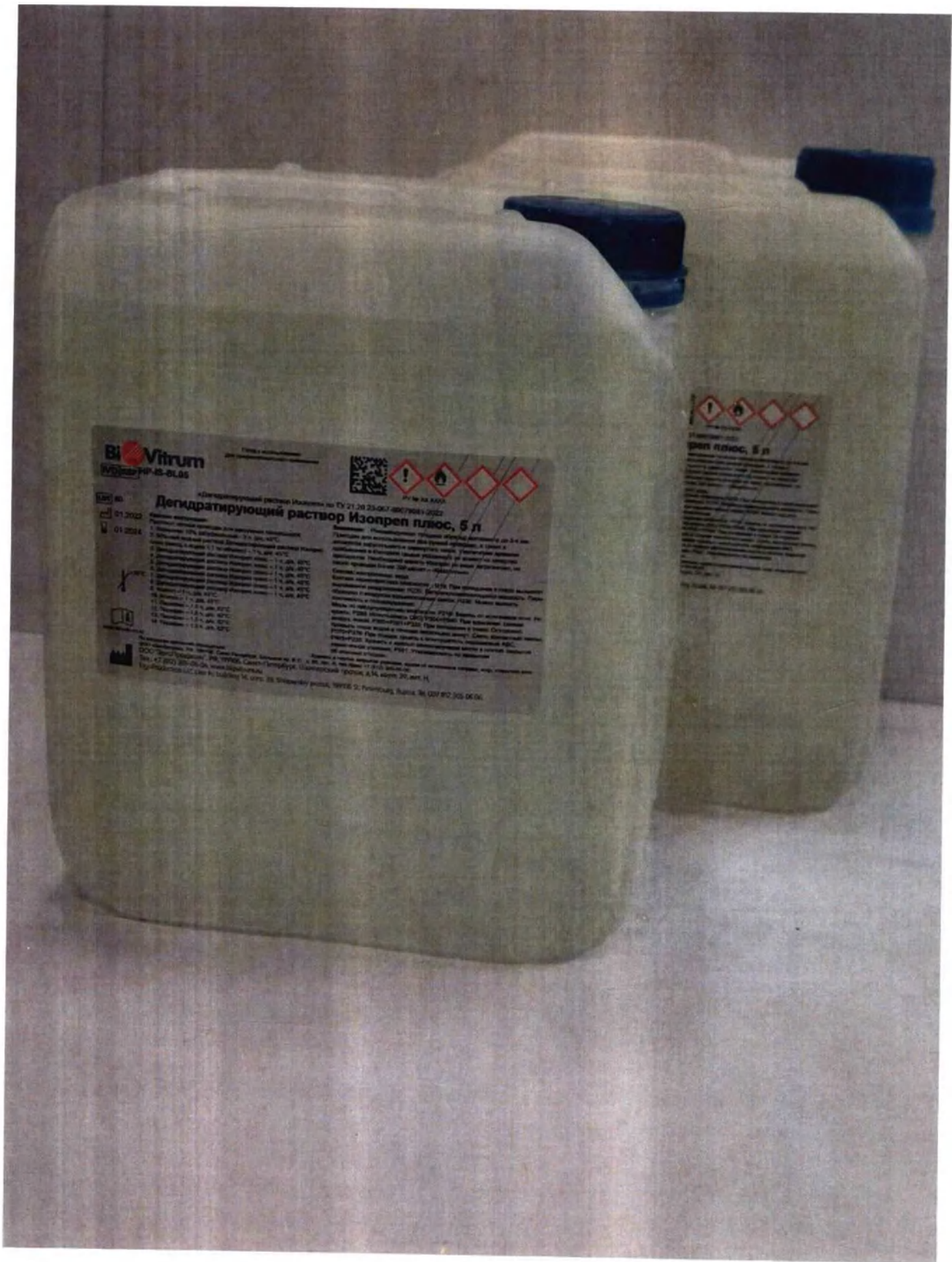

BIO Vitrum
IVD REF HP-4S-BL-10
«Дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН» по ТУ 21 20 23-067-89079081-2022

Дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 10 л

Готово к использованию. Дата производства: 02.2022

РУ № 0000000

Краткие тестирования:

Применение: 10% раствор для лабораторных исследований.

1. Исходный 10% раствор дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 10 л, 40°C.

2. 90%-ый водный раствор дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 10 л, 40°C.

3. 1 л по объему — 1 л, 40°C.

4. Дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 1 л, 40°C.

5. Дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 1 л, 40°C.

6. Дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 1 л, 40°C.

7. Дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 1 л, 40°C.

8. Дегидратирующий раствор ИЗОПРЕН плюс, 1 л, 40°C.

9. Водный — 1 л, 40°C.

10. Водный — 1 л, 40°C.

11. Водный — 1 л, 40°C.


12. Водный — 1 л, 40°C.

13. Водный — 1 л, 40°C.

14. Водный — 1 л, 40°C.

По вопросам приобретения обращайтесь: ООО «БиоВитрум», РФ, 190108, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, Б.О. д. 68, лит. А.
тел./факс: +7 (812) 306-06-06
ООО «Энтелпротекс», РФ, 199004, Санкт-Петербург, Школьный пр-д, д.14, корп.38, лит.14, этаж: +7 (812) 306-06-06, www.biovitrum.ru
GroupProduction LLC, Office N. building 14, corp. 38, Shkolnyskiy pr-dok, 199004 St. Petersburg, Russia, Tel. 812 306 06 06

Фото 12. Образец внешнего вида упаковки. Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 20 л

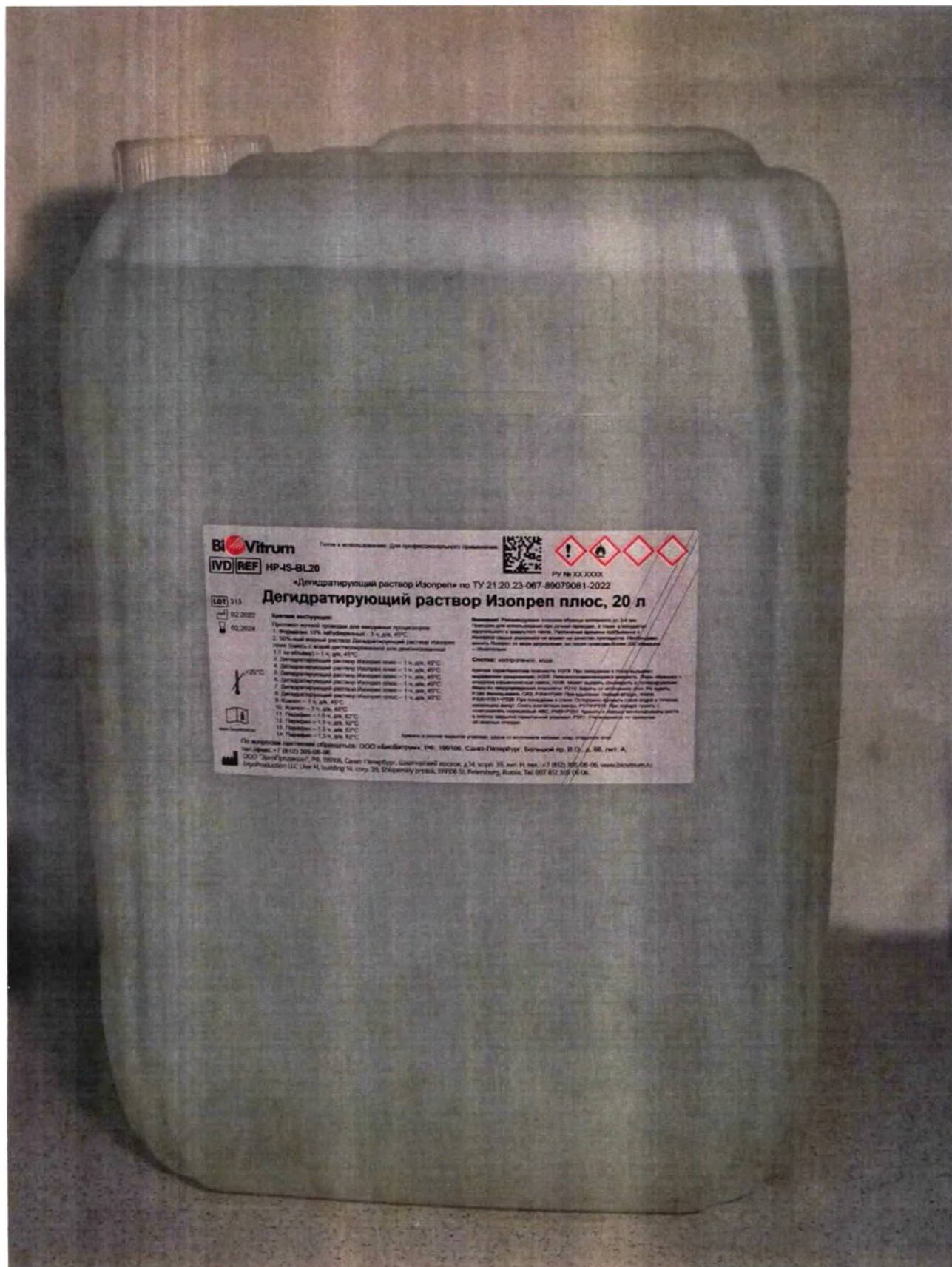

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 26
(двадцать шесть) лист(ов)
Генеральный директор
ООО "ЭргоПромакшн"
Д.В. Усейнов 2022г.
Д.В. Усейнов

