

“УТВЕРЖДАЮ”



Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
Усейнов Д.В.

1 февраля 2022 г.

**Фотографические изображения, данные
о маркировке и упаковке медицинского изделия
«Декальцинирующий раствор» по
ТУ 21.20.23-071-89079081-2022**

Содержание

1. Упаковка	3
2. Маркировка	13

1. Маркировка

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 31340-2013.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-071-89079081-2022, п.1.4.1 Маркировка первичной упаковки, п.1.4.2 Маркировка транспортной упаковки.

Первичная упаковка: Бутылка, 1 л



IVD

REF

HD-DK-AL01






РУ № xxxxxx

«Декальцинирующий раствор»

по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Декальцинирующий

раствор Софтидек на

основе ЭДТА, 1 л



+25°C



+5°C

LOT

XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Состав: трилон Б, вода, гидроксид натрия.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (ингалиционно).

Меры предосторожности: P260: Не дышать парами; P280: После работы тщательно мыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходов.

ООО «ЭргоПродукция», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шонперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106

St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Краткая инструкция:

- 1) Фиксируемый материал поместить в декальцинатор.
- 2) После окончания декальцинации промыть в проточной воде 20 мин, затем отправить в проводку.

Для оценки успешности декальцинации рекомендуется:

- 1) Промыть водой 1-2 мин фиксированный образец. Высушить фильтровальной бумагой для удаления избытка излишней воды.
- 2) Взвесить материал с точностью до 1 мг и зафиксировать начальную массу.
- 3) Промывать образец в проточной воде, сушить и взвешивать ежедневно, записывая массу.
- 4) Как только кальций полностью будет удален, вода начнет замешать кальций и масса станет расти. Это точка, в которой кальций полностью выходит из образца. Когда образец начнет прибавлять массу, следует удалить его из декальцинирующего раствора, промыть в проточной воде 10 минут и отправить в проводку.

Примечание:

Рекомендуемое соотношение объемов декальцинируемого материала и жидкости составляет не менее 1:100. Декальцинация мелких фрагментов занимает от 1 до 4 суток, крупных 14 суток и более. Раствор необходимо менять ежедневно. Ускорить декальцинацию можно повысив температуру раствора до 37 °C используя термостат, что позволит ускорить процесс удаления солей кальция в 1,5 раза. Проклет иглой препарата рекомендуется только если образец слишком маленький и только в конце декальцинации. Если образец истончился достаточно большой, рекомендуется проверить на гниб - взять образец в перчатках, слегка присогнуть (если удается). Далее контролировать процесс иглой. Проверить образец не чаще раза в сутки до полной декальцинации.


www.biovitrum.ru

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Готов к использованию. Для профессионального применения.

По вопросам претензий обращаться:

ООО «БиоВитрум», РФ, 191108, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭрогПродукшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru

EroгProduct LLC Ural, building 14, corp. 39, Shipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-AL01 Для профессионального применения. Готов к использованию. !	
«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022 Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 1 л	
LOT XXXXXX +2°C +30°C MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток MM.ГГГГ ПУ № XXXXXX	Кол-во штук: Масса нетто: Масса брутто: Масса нетто потребительской упаковки:
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru	

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 2,5 л

Первичная упаковка:



IVD REF HD-DK-AD25

Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Декальцинирующий раствор»
по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022




ПУ № XX.XXXX

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 2,5 л

Краткая инструкция:

- 1) Фиксированный материал поместить в декальциниатор.
- 2) После окончания декальцинации промыть в проточной воде 20 мин, затем отправить в проводку.
- 3) Промывать образец в проточной воде, сушить и взвешивать ежедневно, записывая массу.
- 4) Как только кальций полностью будет удален, вода начнет замещать кальций и масса станет расти. Это точка, в которой кальций полностью выходит из образца. Когда образец начнет прибавлять массу, следует удалить его из декальцинирующего раствора, промыть в проточной воде 10 минут и отправить в проводку.

Примечание: Рекомендуемое соотношение объемов декальцинируемого материала и жидкости составляет не менее 1:100. Декальцинация мелких фрагментов занимает от 1 до 4 суток, крупных 14 суток и более. Раствор необходимо менять ежедневно. Ускорить декальцинацию можно повысив температуру раствора до 37 °С используя термостат, что позволит ускорить процесс удаления солей кальция в 1,5 раза. Прокол иглой препарата рекомендуется только если образец слишком маленький и только в конце декальцинации. Если образец костной ткани достаточно большой, рекомендуется проверить на гиб - взять образец в перчатках, слегка присогнуть (если удается). Далее контролировать процесс иголкой. Проверять образец не чаще раза в сутки до полной декальцинации.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Состав: трилон Б, вода, гидроксид натрия.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (ингаляционно).

Меры предосторожности: P260: Не вдыхать пары; P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P314: В случае полного самокутания обратиться к врачу; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 2,5 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-AD25

Для профессионального применения.
Готов к использованию.




«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 2,5 л

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток


ПУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

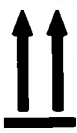


По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 5 л

Первичная упаковка: Канистра 5 л



IVD REF HD-DK-AL05 по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Декальцинирующий раствор»




ПУ № XX.XXXX

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 5 л

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

Температура:
+25°C
+5°C

www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:
1) Фиксированный материал поместить в декальцинатор.
2) После окончания декальцинации промыть в проточной воде 20 мин, затем отправить в проводку.
3) Для оценки успешности декальцинации рекомендуется:
1) Промыть водой 1-2 мин фиксированный образец. Высушить фильтровальной бумагой для удаления избытка излишней воды.
2) Взвесить материал с точностью до 1 мг и зафиксировать начальную массу.
3) Промывать образец в проточной воде, сушить и взвешивать ежедневно, записывая массу.
4) Как только кальций полностью будет удален, вода начнет замещать кальций и масса начнет расти. Это точка, в которой кальций полностью выходит из образца. Когда образец начнет прибавлять массу, следует удалить его из декальцинирующего раствора, промыть в проточной воде 10 минут и отправить в проводку.
Примечание: Рекомендуемое соотношение объемов декальцинируемого материала и жидкости составляет не менее 1:100. Декальцинация мелких фрагментов занимает от 1 до 4 суток, крупных 14 суток и более. Раствор необходимо менять ежедневно. Ускорить декальцинацию можно повысив температуру раствора до 37 °С используя термостат, что позволит ускорить процесс удаления солей кальция в 1,5 раза. Прокол иглой препарата рекомендуется только если образец слишком маленький и только в конце декальцинации. Если образец костной ткани достаточно большой, рекомендуется проверить на гиб - взять образец в перчатках, слегка присогнуть (если удастся). Далее контролировать процесс иглой. Проверять образец не чаще раза в сутки до полной декальцинации.

Состав: трилон Б, вода, гидроксид натрия.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение; H373: Может нанести вред органам в результате длительного или многократного воздействия (Иммуногенно).
Меры предосторожности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу; P337+P313: Если раздражение глаз продолжает: обратиться к врачу; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 5 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-AL05

Для профессионального применения.
Готов к использованию.




«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022 Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 5 л

LOT XXXXXX
MM.GTTT
MM.GTTT

Температура:
+30°C
+2°C

При температурах выше 25°C – до трех суток

ПУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____




По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

BioVitrum

IVD REF HD-DK-BL01 PY № xxxxxx

«Декальцинирующий раствор»
по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

**Декальцинирующий раствор
Софтидек на основе ЭДТА в
кислотном буфере, 1 л**



Состав: трилон Б, цитрат натрия, тартрат натрия, вода, хлорид натрия, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:
H290: Может вызывать коррозию металлов; H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры предосторожности:
P234: Держать герметично в упаковке заводского изготовителя; P260: Избегать вдыхания; P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоты! P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:
1) Фиксированный материал поместить в декальцинатор на 90 мин (при толщине образца <3 мм).
2) Промыть в двух сменах фосфатно-солевого буфера с pH 7,4 по 15 мин, в качестве промывки можно использовать проточную воду.
3) Дегидратировать фрагмент в спиртах, залить в парафин.

Примечание:
Рекомендуемая толщина образца не более 5 мм. Время декальцинации должно быть увеличено при работе с фрагментами большего размера, а также с компактной костной тканью.
Объемные соотношения: образец/декальцинатор 1:100.

Хранить в плотно закрытой упаковке. www.biovitrum.ru
Готов к использованию. Для профессионального применения.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-BL01

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 2,5 л

Первичная упаковка: Канистра 2,5 л



IVD REF HD-DK-BD25 по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Декальцинирующий раствор»




ПУ № XX.XXXX

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 2,5 л

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+5°C

+25°C

www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:

- 1) Фиксированный материал поместить в декальцинатор на 90 мин (при толщине образца <3 мм).
- 2) Промыть в двух сменах фосфатно-солевого буфера с pH 7,4 по 15 мин, в качестве промывки можно использовать проточную воду.
- 3) Дегидратировать фрагмент в спиртах, залить в парафин.

Примечание:
Рекомендуемая толщина образца не более 5 мм. Время декальцинации должно быть увеличено при работе с фрагментами большего размера, а также с компактной костной тканью. Объемные соотношение: образец/декальцинатор 1:100.

Состав: трилон Б, цитрат натрия, тартрат натрия, вода, хлорид натрия, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности: H290: Может вызывать коррозию металлов; H314: При попадании на кожу и глаза вызывает химические ожоги; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры предосторожности: P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой; P304+P340: При вдыхании: Сменить воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Ul'yanovsk, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
 www.biovitrum.ru

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 2,5 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-BD25

Для профессионального применения.
Готов к использованию.




«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 2,5 л

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

PU № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____




По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н.
 Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Первичная упаковка: Канистра 5 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-BL05		Для профессионального применения. Готов к использованию.		! ☞	
«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022					
Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 5 л					
LOT xxxxxx +30°C +2°C		Кол-во штук:		↑↑ ☂	
MM.GGG При температурах выше 25°C – до трех суток		Масса нетто:			
MM.GGG		Масса брутто:			
PU № xxxxxx		Масса нетто потребительской упаковки:			
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Декальцинирующий раствор электролитный, 1 л
Первичная упаковка: Бутылка, 1 л

BiVitrum

IVD REF HD-DK-CL01 РУ № xxxxxx

«Декальцинирующий раствор»
по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

**Декальцинирующий
раствор
электролитный, 1 л**



Состав: вода, хлорид натрия,
кислота муравьиная, кислота
соляная.

Краткая характеристика опасности:
H290: Может вызывать коррозию металлов; H314:
При попадании на кожу и в глаза вызывает
химические ожоги; H335: Может вызывать
раздражение верхних дыхательных путей.
Меры предосторожности:
P234: Держать только в упаковке завода-
изготовителя; P280: Использовать СИЗ;
P301+P330+P331: При проглатывании:
Прополоскать рот. Не вызывать рвоты!
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или
волосы): Немедленно снять всю загрязненную
одежду/кожу промыть водой; P304+P340: При
вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338:
При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза
водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы; P403+P233: Хранить в хорошо
вентилируемом месте в плотно
закрытой/герметичной упаковке; P501:
Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Температурный режим: +5°C до +25°C

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BiVitrum

Краткая инструкция:
1) Фиксированный материал поместить в раствор на 6-12 часов.
2) Промыть материал в проточной воде 1 час, либо трижды обработать в фосфатно-солевом буфере с pH 7,4 (длительность одной обработки 20 мин).

Примечание: рекомендуемая толщина образца не более 5 мм. Соотношение материал/декальцинатор 1:100. Раствор содержит кислоты, работать с применением защитных средств (резиновых перчаток, защитных очков).

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Готов к использованию. Для профессионального применения.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Декальцинирующий раствор электролитный, 1 л
Этикетка на транспортную упаковку

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

IVD REF HD-DK-CL01

«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Декальцинирующий раствор электролитный, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

Температурный режим: +2°C до +30°C

При температурах выше 25°C — до трех суток

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Декальцинирующий раствор электролитный, 2,5 л
Первичная упаковка: Канистра 2,5 л

BiVitrum

IVD REF HD-DK-CD25

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

«Декальцинирующий раствор»
по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

QR

PU № XX.XXXX

!

☞

☞

☞

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

Краткая инструкция:

1) Фиксированный материал поместить в раствор на 6-12 часов.

2) Промыть материал в проточной воде 1 час, либо трижды обработать в фосфатно-солевом буфере с pH 7,4 (длительность одной обработки 20 мин).

Примечание: рекомендуемая толщина образца не более 5 мм. Соотношение материал/декальцинатор 1:100. Раствор содержит кислоты, работать с применением защитных средств (резиновых перчаток, защитных очков).

Состав: вода, хлорид натрия, кислота муравьиная, кислота соляная.

25°C

5°C

www.biovitrum.ru

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 190106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Краткая характеристика опасности:

H290: Может вызывать коррозию металлов; H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры предосторожности:

P234: Держать только в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду; кожу промыть водой; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; R403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Декальцинирующий раствор электролитный, 2,5 л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-CD25

Для профессионального применения.
Готов к использованию.

!

☞

☞

☞

QR

«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Декальцинирующий раствор электролитный, 2,5 л

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

PU № xxxxxx

30°C

2°C

При температурах выше 25°C – до трех суток

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

Масса нетто потребительской упаковки:

↑↑

☂

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11

Декальцинирующий раствор электролитный, 5 л

Первичная упаковка: Канистра 5 л



IVD REF HD-DK-CL05

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

«Декальцинирующий раствор»
по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022



ПУ № XX.XXXX

Декальцинирующий раствор электролитный, 5 л

LOT XXXXXX

 XX.XXXX

 YY.YYYY

Краткая инструкция:

1) Фиксированный материал поместить в раствор на 6-12 часов.

2) Промыть материал в проточной воде 1 час, либо трижды обработать в фосфатно-солевом буфере с pH 7,4 (длительность одной обработки 20 мин).

Примечание: рекомендуемая толщина образца не более 5 мм. Соотношение материал/декальциниатор 1:100. Раствор содержит кислоты, работать с применением защитных средств (резиновых перчаток, защитных очков).

Состав: вода, хлорид натрия, кислота муравьиная, кислота соляная.

Краткая характеристика опасности:

H290: Может вызывать коррозию металлов; H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги; H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Меры предосторожности:

P234: Держать удаленно в упаковке завода-изготовителя; P280: Использовать СИЗ; P301+P330+P331: При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Litter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Декальцинирующий раствор электролитный, 5 л

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HD-DK-CL05

Для профессионального применения.
Готов к использованию.



«Декальцинирующий раствор» по ТУ 21.20.23-071-89079081-2022

Декальцинирующий раствор электролитный, 5 л

LOT XXXXXX

 MM.ГГГГ

 MM.ГГГГ

ПУ № XXXXXX

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

Масса нетто потребительской упаковки:

Температурный режим:

+30°C

+2°C

При температурах выше 25°C – до трех суток





По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

2. Упаковка

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-071-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-071-89079081-2022 п.1.5.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом, связаны с разными производителями данной упаковки и относятся к одному варианту исполнения изделия.

Допускается использование бутылки 1 л без рельефного логотипа "BioVitrum".

Фото 1. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 1 л лицевая сторона

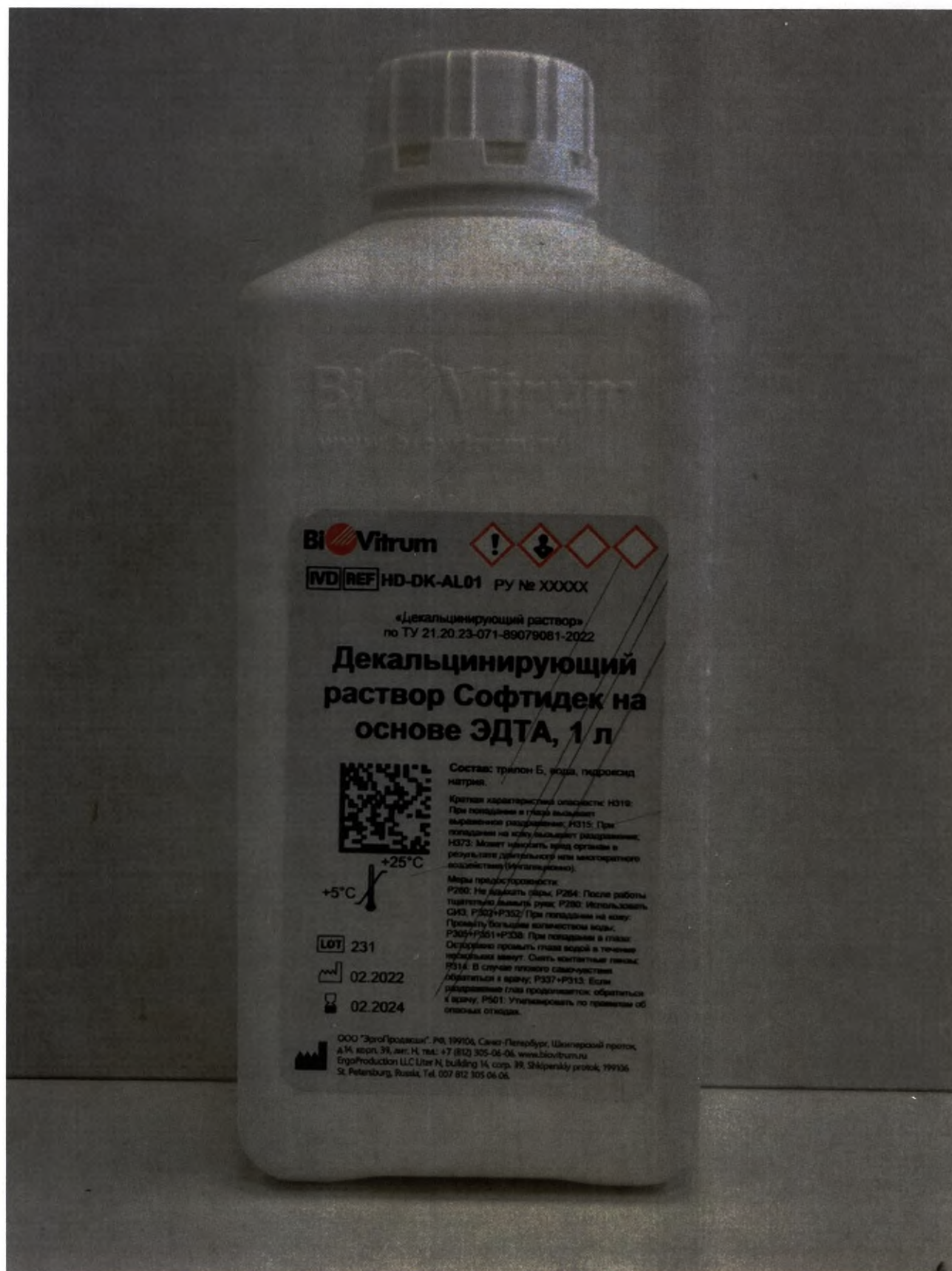


Фото 2. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 1 л оборотная сторона

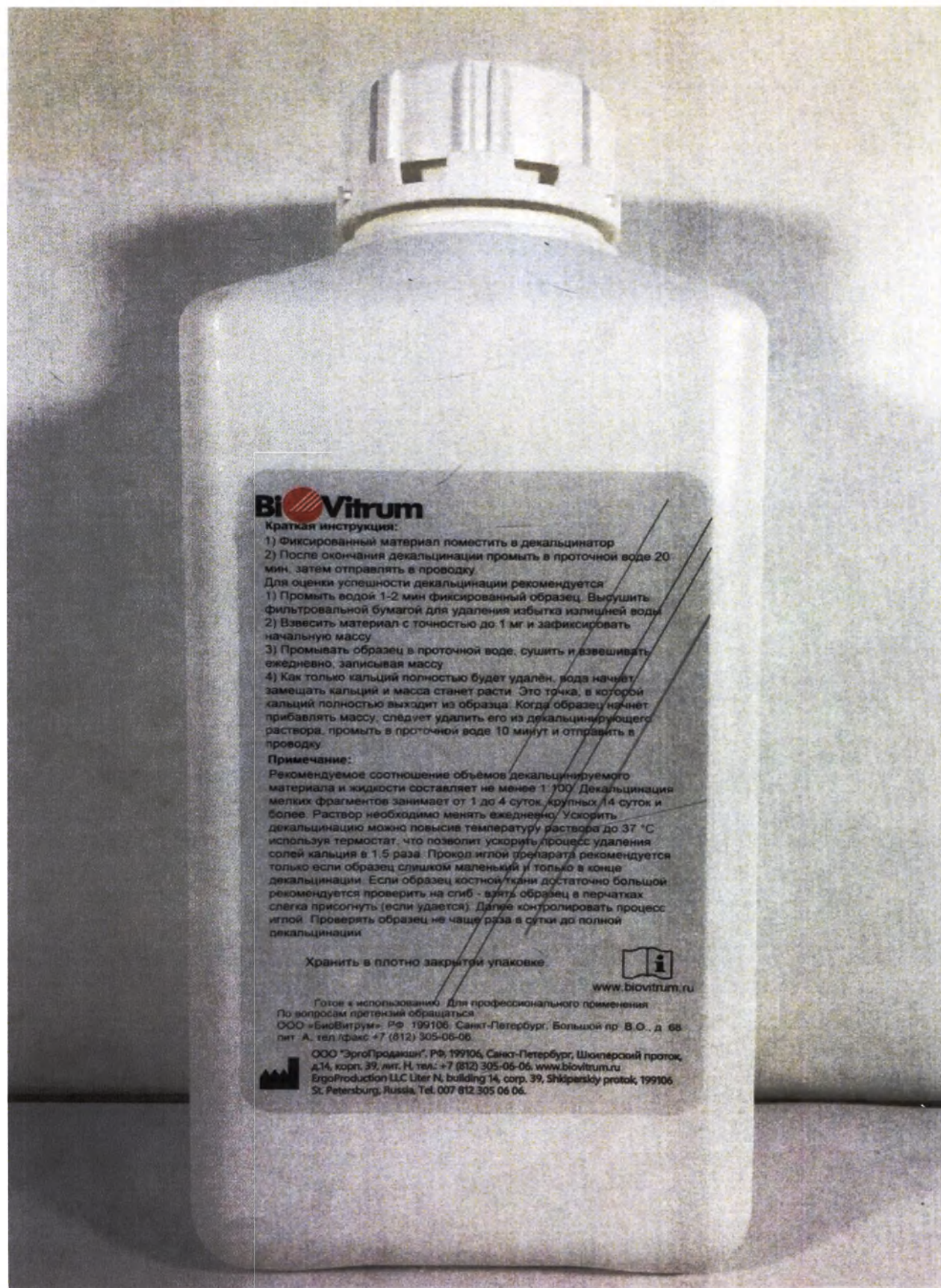


Фото 3. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 2,5 л вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 4. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА, 5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 6. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 1 л оборотная сторона

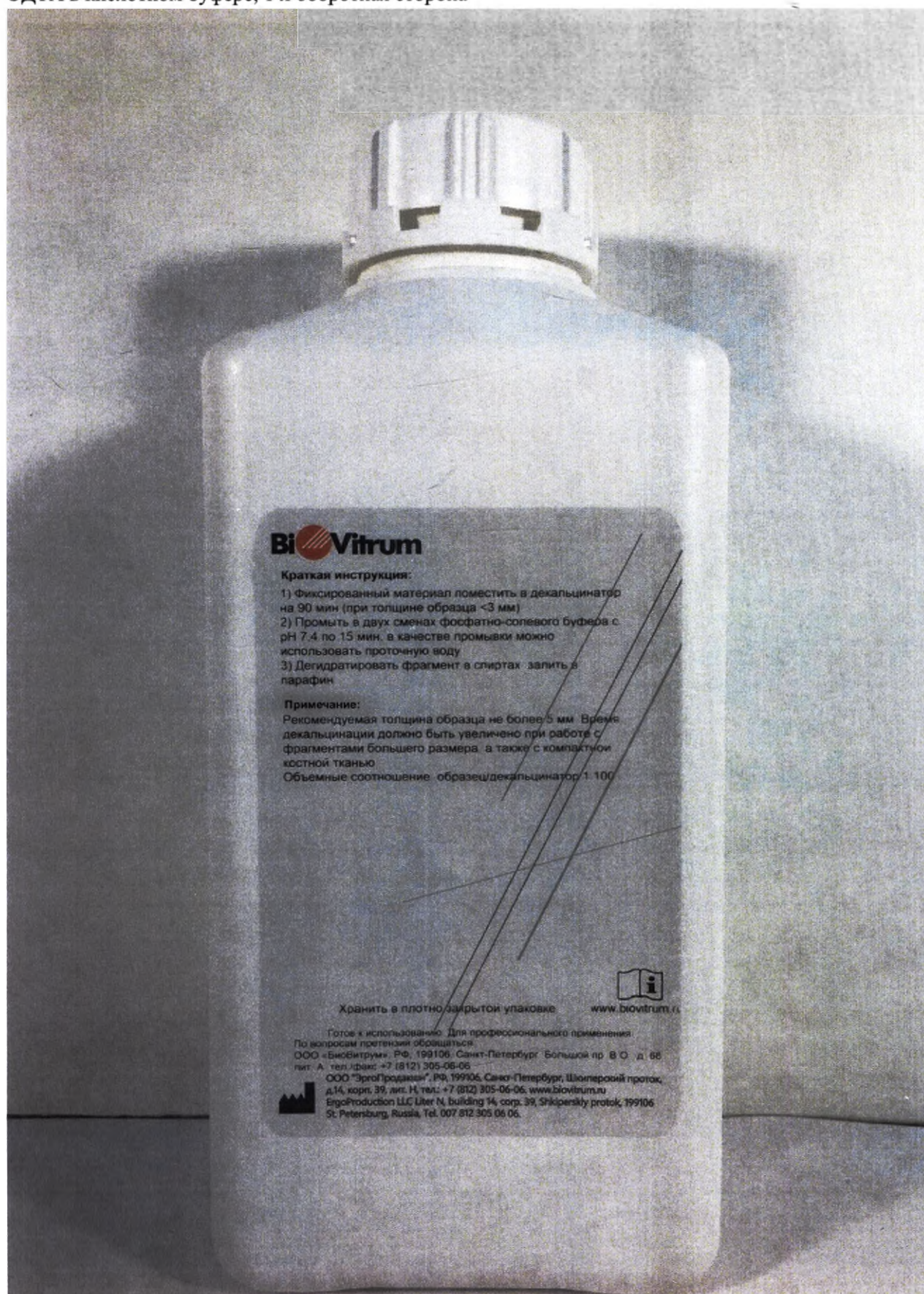


Фото 7. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 2,5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 8. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор Софтидек на основе ЭДТА в кислотном буфере, 5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2

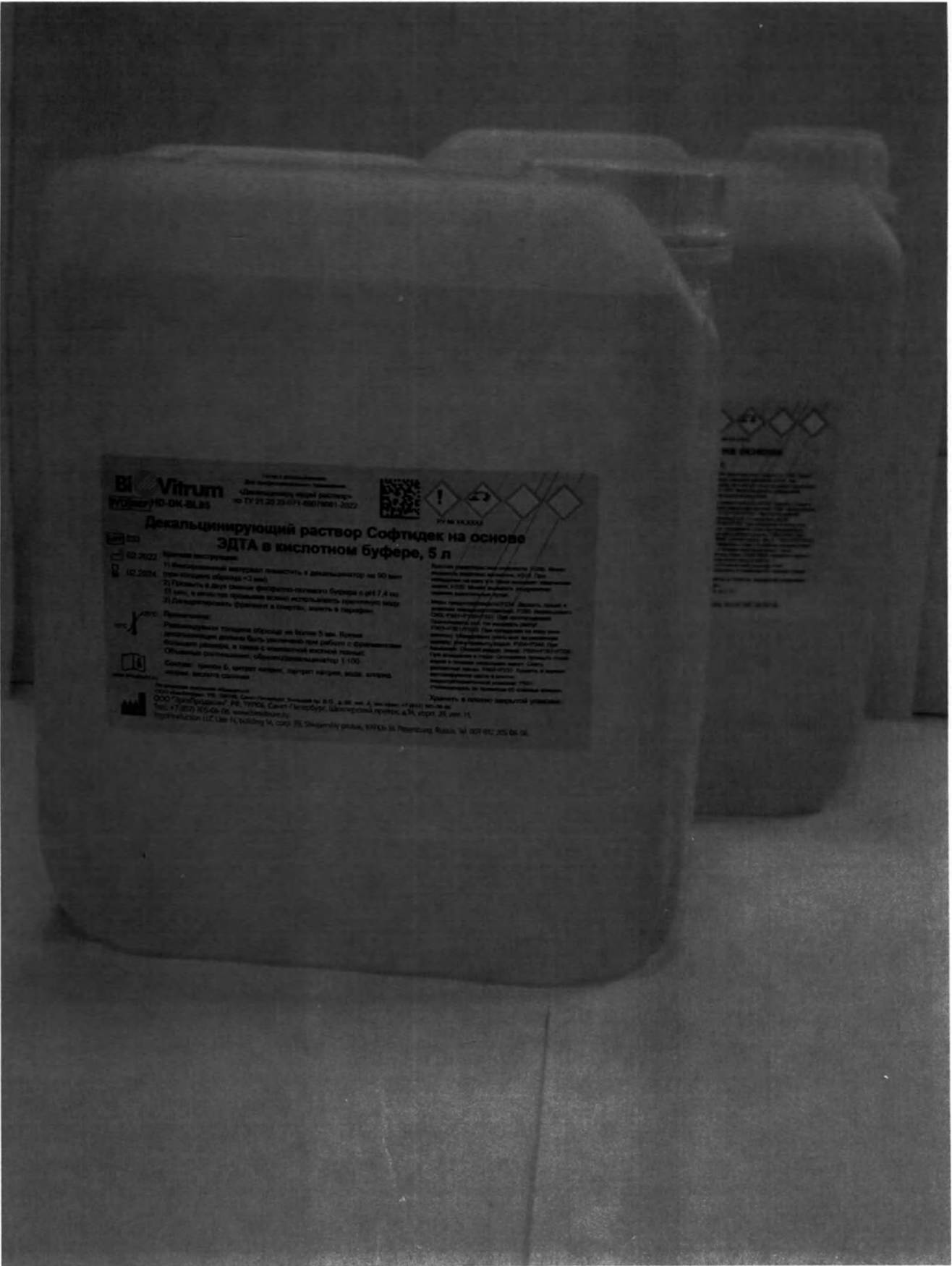


Фото 9. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор электролитный, 1 л лицевая сторона

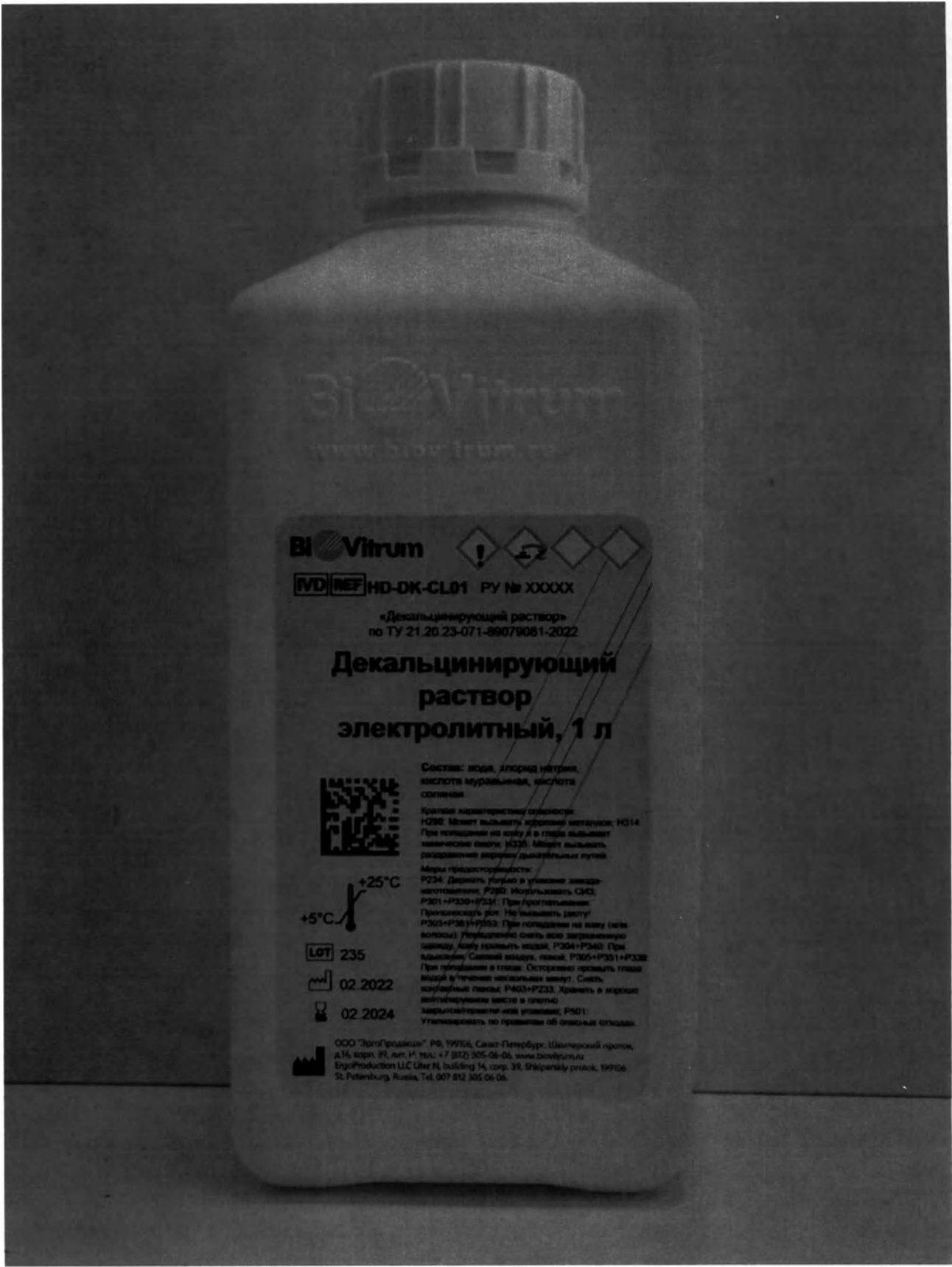


Фото 10. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор электролитный, 1 л
оборотная сторона

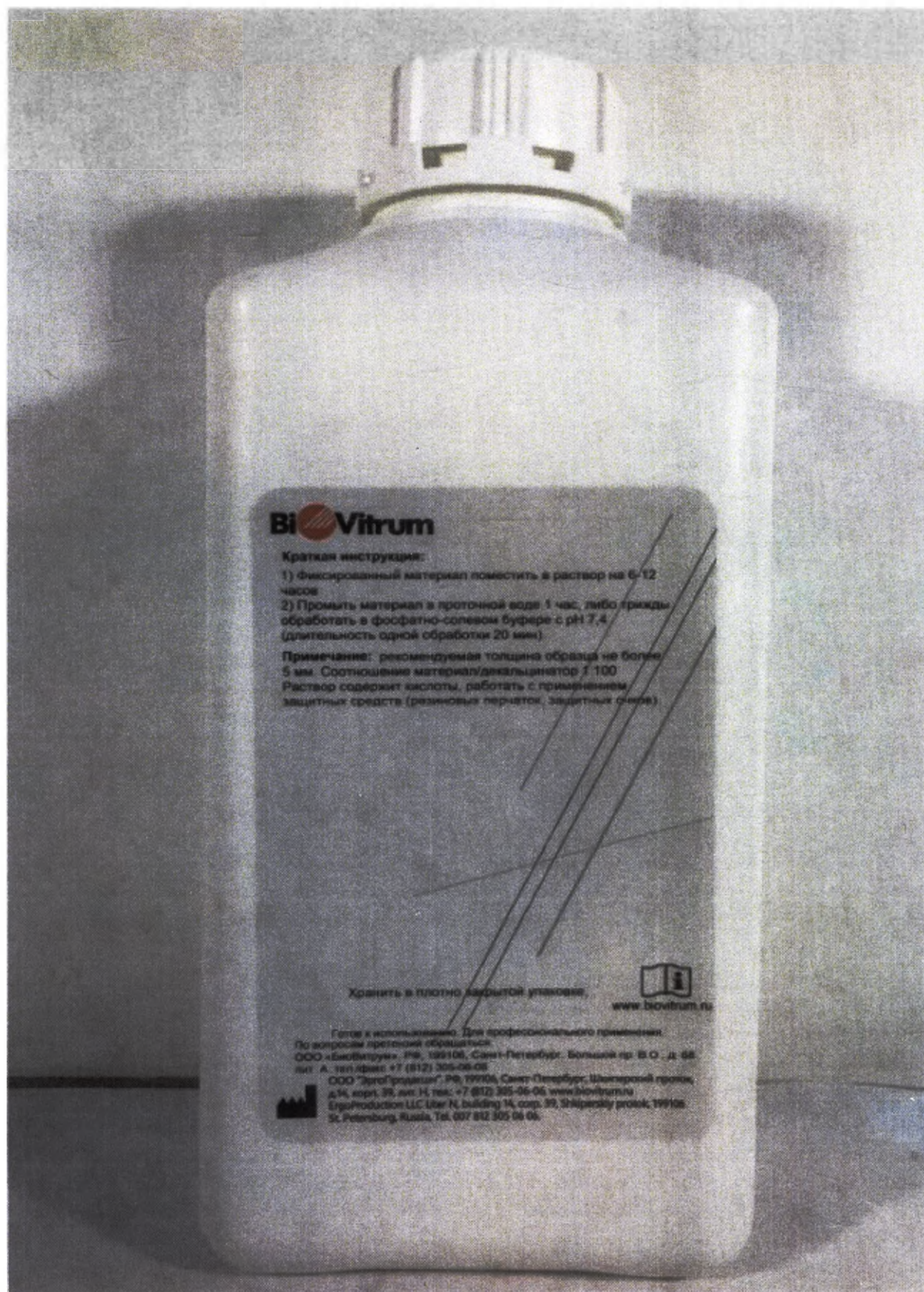


Фото 11. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор электролитный, 2,5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 12. Образец внешнего вида упаковки. Декальцинирующий раствор электролитный, 5 л, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 22

(Министерство здравоохранения) лист(ов)

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

Д.В. Усейнов 2022г.

Д.В. Усейнов

