



“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

ООО “ЭргоПродакшн”

Усейнов Д.В.

7 февраля 2022

**Фотографические изображения, данные о
маркировке и упаковке медицинского изделия
«Раствор эозина»
по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022**

Содержание

1. Маркировка	3
2. Упаковка	10

1. Маркировка

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 31340-2013.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-070-89079081-2022, п.1.4.1 Маркировка первичной упаковки, п.1.4.2 Маркировка транспортной упаковки.

Раствор эозина водный, 250 мл

Первичная упаковка: Бутылка 250 мл

BioVitrum
Готов к использованию.
Для профессионального применения.
«Раствор эозина»
по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022
РУ № XXXXXX

IVD REF HK-EV-A250
Раствор эозина водный, 250 мл

Краткая инструкция:
1) Дегидратированный срез гидратировать до дистиллированной воды.
2) Поместить срез в раствор гематоксилина, оставить на 5-25 минут (в соответствии с инструкцией на используемый гематоксилин).
3) Подсинивать срез в проточной воде в течение 1-5 минут (до желаемого оттенка).
4) Раствором эозина окрашивать в течение 1-7 минут (до желаемой интенсивности окраски).
5) Промыть срез в дистиллированной воде.
6) Дегидратировать, просветлить, заключить.
Результат окраски: ядра синие или сине-фиолетовые. Цитоплазма и другие зоинофильные структуры розовые.
Состав: вода, консервант, эритрозин, эозин Н.
Хранить в плотно закрытой упаковке

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Раствор эозина водный, 250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-EV-A250
Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022
Раствор эозина водный, 250 мл

LOT XXXXXX
+25°C
+2°C

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

PU № XXXXXX

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
www.biovitrum.ru

Раствор эозина водный, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка 500 мл

		Готов к использованию. Для профессионального применения.			
IVD REF HK-EV-A500		ПУ № XX.XXXX			
«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022					
Раствор эозина водный, 500 мл					
LOT XXXXXX  XX.XXXX  YY.YYYY	Краткая инструкция: 1) Депарафинированный срез гидратировать до дистиллированной воды. 2) Поместить срез в раствор гематоксилина, оставить на 5-25 минут (в соответствии с инструкцией на используемый гематоксилин). 3) Подснимать срез в проточной воде в течение 1-5 минут (до желаемого оттенка). 4) Раствором эозина окрашивать в течение 1-7 минут (до желаемой интенсивности окраски). 5) Промыть срез в дистиллированной воде. 6) Дегидратировать, просветлить, заключить. Результат окраски: ядра синие или сине-фиолетовые. Цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые				Состав: вода, консервант, эритрозин, эозин Н.
 +25°C +5°C	Хранить в плотно закрытой упаковке				
 www.biovitrum.ru	По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.				

Раствор эозина водный, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-EV-A500		Для профессионального применения. Готов к использованию.		
«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022				
Раствор эозина водный, 500 мл				
LOT XXXXXX  MM.ГГГГ  MM.ГГГГ ПУ № XXXXXX	 +25°C +2°C	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____	 	
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru				

Раствор эозина водный, 1л
Первичная упаковка: Бутылка 1л




IVD REF HK-EV-AL01

РУ № XXXXXX

«Раствор эозина» по
 ТУ 21.20.23-070-89079081-2022

Раствор эозина водный, 1 л



Состав: вода, консервант, эритрозин,
 эозин Н.



+5°C
 +25°C

LOT XXXXXX
 XX.XXXX
 YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.




Краткая инструкция:

- 1) Дегидратированный срез гидратировать до дистиллированной воды.
- 2) Поместить срез в раствор гематоксилина, оставить на 5-25 минут (в соответствии с инструкцией на используемый гематоксин).
- 3) Подсинивать срез в проточной воде в течение 1-5 минут (до желаемого оттенка).
- 4) Раствором эозина окрашивать в течение 1-7 минут (до желаемой интенсивности окраски).
- 5) Промыть срез в дистиллированной воде.
- 6) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Результат окраски: ядра синие или сине-фиолетовые. Цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.

Хранить в плотно закрытой упаковке



Готов к использованию. Для профессионального применения.
 По вопросам претензий обращаться:
 ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
 ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.



Раствор эозина водный, 1л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-EV-AL01

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.



«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022

Раствор эозина водный, 1 л

LOT XXXXXX


+2°C
 +25°C

 MM.ГГГГ
 MM.ГГГГ
 РУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____
 Масса нетто: _____
 Масса брутто: _____
 Масса нетто потребительской упаковки: _____




По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Раствор эозина спиртовой, 250 мл
Первичная упаковка: Бутылка 250 мл

BiVitrum
IVD REF HK-ES-B250
Раствор эозина спиртовой, 250 мл

Готов к использованию.
 Для профессионального применения.
 «Раствор эозина» по
 ТУ 21.20.23-070-89079081-2022

Краткая инструкция:
 1) Дегидратированный срез гидратировать в спиртах до дистиллированной воды.
 2) Поместить срез в раствор гематоксилина, оставить на 5-25 минут (в соответствии с инструкцией на используемый гематоксилин).
 3) Подсвечивать срез в проточной воде в течение 1-5 минут (до желаемого оттенка).
 4) Раствором эозина окрашивать в течение 1-5 минут (до желаемой интенсивности окраски).
 5) Быстро дегидратировать в абсолютированных спиртах (5-10 с).
 6) Просветлять, заключить.
 Результат окраски: ядра - синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинфильные структуры - розовые.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Ul'ter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia. Tel. 007 812 305 06 06.
 www.biovitrum.ru

Решение № XXXXXX

Состав: вода, изопропанол, эозин Н, кислота уксусная.

Краткая характеристика опасности: H319; H229; H336.
 Меры предосторожности: P210; P280; P304+P340; P305+P351+P338; P370+P378; P403+P233; P501.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

Раствор эозина спиртовой, 250 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-ES-B250

Для профессионального применения.
 Готов к использованию.

«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022
Раствор эозина спиртовой, 250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

↑↑

☂

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Раствор эозина спиртовой, 500 мл
Первичная упаковка: Бутылка 500 мл



Готов к использованию. Для профессионального применения.

IVD REF HK-ES-B500



ПУ № XX.XXXX



LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+5°C



www.biovitrum.ru

«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022

Раствор эозина спиртовой, 500 мл

Краткая инструкция:

- 1) Депарафинированный срез гидратировать в спиртах до дистиллированной воды.
- 2) Поместить срез в раствор гематоксилина, оставить на 5-25 минут (в соответствии с инструкцией на используемый гематоксин).
- 3) Подсинивать срез в проточной воде в течении 1-5 минут (до желаемого оттенка).
- 4) Раствором эозина окрашивать в течении 1-5 минут (до желаемой интенсивности окраски).
- 5) Быстро дегидратировать в абсолютных спиртах (5-10 с).
- 6) Просветлить, заключить.

Результат окраски: ядра - синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры-розовые.

Состав: вода, изопропанол, эозин Н, кислота уксусная.

Краткая характеристика опасности: H318: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H225: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры предосторожности: P210: Беречь от огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух, покой; P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить с огнетушителем порошковый ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой оригинальной упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Раствор эозина спиртовой, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-ES-B500

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

ПУ № XXXXXX

Для профессионального применения.

Готов к использованию.

«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022

Раствор эозина спиртовой, 500 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____





По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

Раствор эозина спиртовой, 1л
Первичная упаковка: Бутылка 1л

BioVitrum 
IVD REF HK-ES-BL01 PY № xxxxxx

«Раствор эозина» по
ТУ 21.20.23-070-89079081-2022

**Раствор эозина
спиртовой, 1 л**



Состав: вода, изопропанол, эозин
H, кислота уксусная.
Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает
выраженное раздражение; H226:
Воспламеняющаяся жидкость. Пары
образуют с воздухом взрывоопасные
смеси; H338: Может вызвать сонливость и
головокружение.
Меры предосторожности: P210: Беречь от
огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ;
P304+P340: При вдыхании: Свежий воздух,
покой; P305+P351+P338: При попадании в
глаза: Осторожно промыть глаза водой в
течение нескольких минут. Снять
контактные линзы; P370+P378: При пожаре
тушить с огнетушителем порошковый ABC;
P403+P233: Хранить в хорошо
вентилируемом месте в плотно закрытой
герметичной упаковке; P501:
Утилизировать по правилам об опасных
отходах.

+5°C  +25°C

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:
1) Депарафинированный срез гидратировать в спиртах
до дистиллированной воды.
2) Поместить срез в раствор гематоксилина, оставить
на 5-25 минут (в соответствии с инструкцией на используемый
гематоксин).
3) Подсаливать срез в проточной воде в течении 1-5 минут
(до желаемого оттенка).
4) Раствором эозина окрашивать в течении 1-5 минут
(до желаемой интенсивности окраски).
5) Быстро дегидратировать в абсолютных спиртах
(5-10 с).
6) Просветлить, заключить.
Результат окраски: ядра - синие или сине-фиолетовые,
цитоплазма и другие эозинофильные структуры - розовые.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от
источников нагрева, искр, открытого огня.

Готов к использованию. Для профессионального применения.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68,
лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток,
д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106
St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

 www.biovitrum.ru

Раствор эозина спиртовой, 1л
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-ES-BL01 Для профессионального применения.
Готов к использованию.

«Раствор эозина» по ТУ 21.20.23-070-89079081-2022

Раствор эозина спиртовой, 1 л

LOT XXXXXX Кол-во штук: _____
+2°C  +25°C
ММ.ГГГГ Масса нетто: _____
ММ.ГГГГ Масса брутто: _____
PY № xxxxxx Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой
пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н.
Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

2. Упаковка

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-070-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-070-89079081-2022 п.1.5.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом и связаны с разными производителями данной упаковки и относятся к одному варианту исполнения изделия. Допускается использование бутылки 1 л без рельефного логотипа "BioVitrum".

Фото 1. Образец внешнего вида упаковки. Раствор эозина водный, 250мл, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 2. Образец внешнего вида упаковки. Раствор эозина водный, 500мл

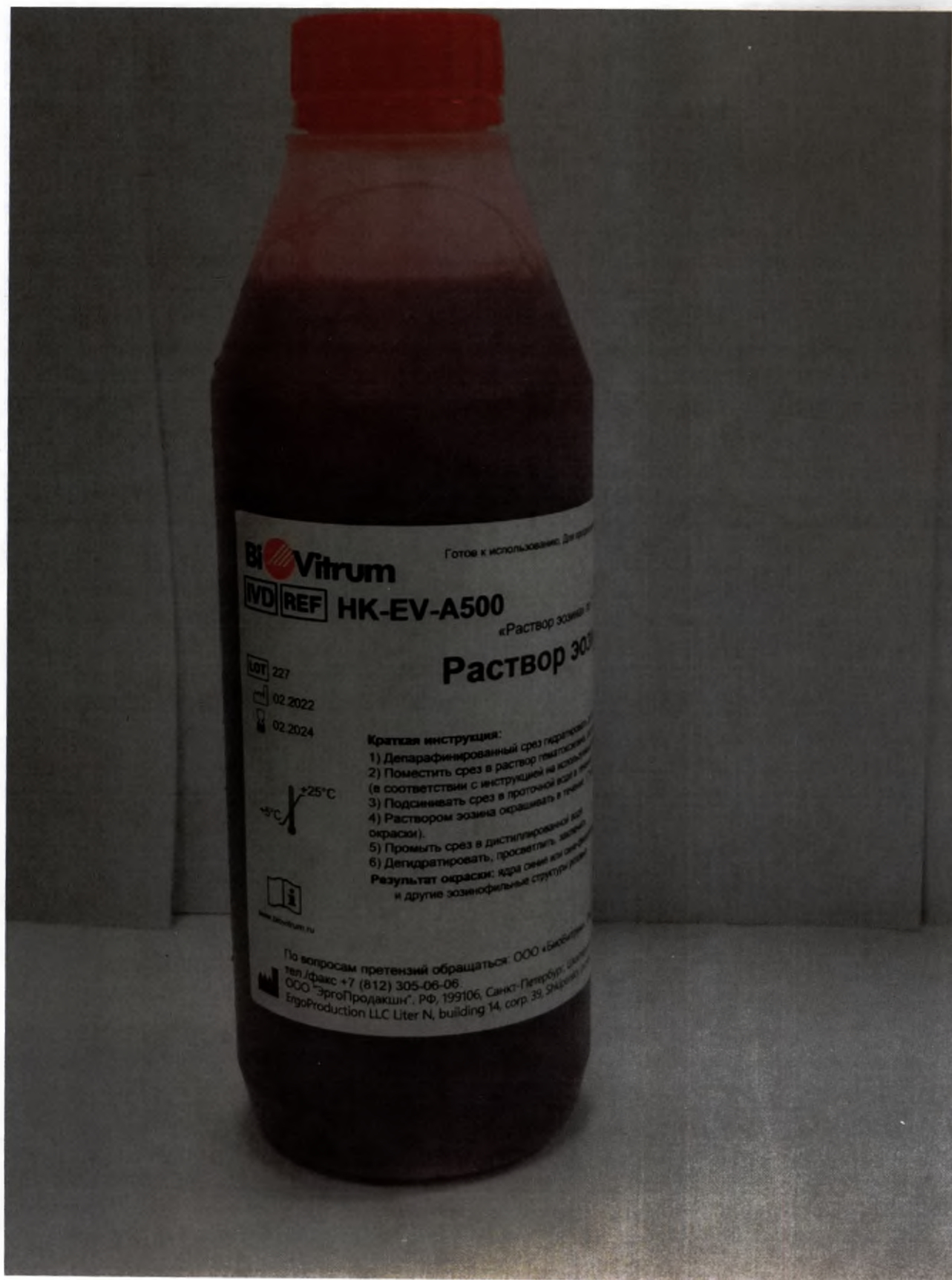


Фото 3. Образец внешнего вида упаковки. Раствор эозина водный, 1л, лицевая сторона

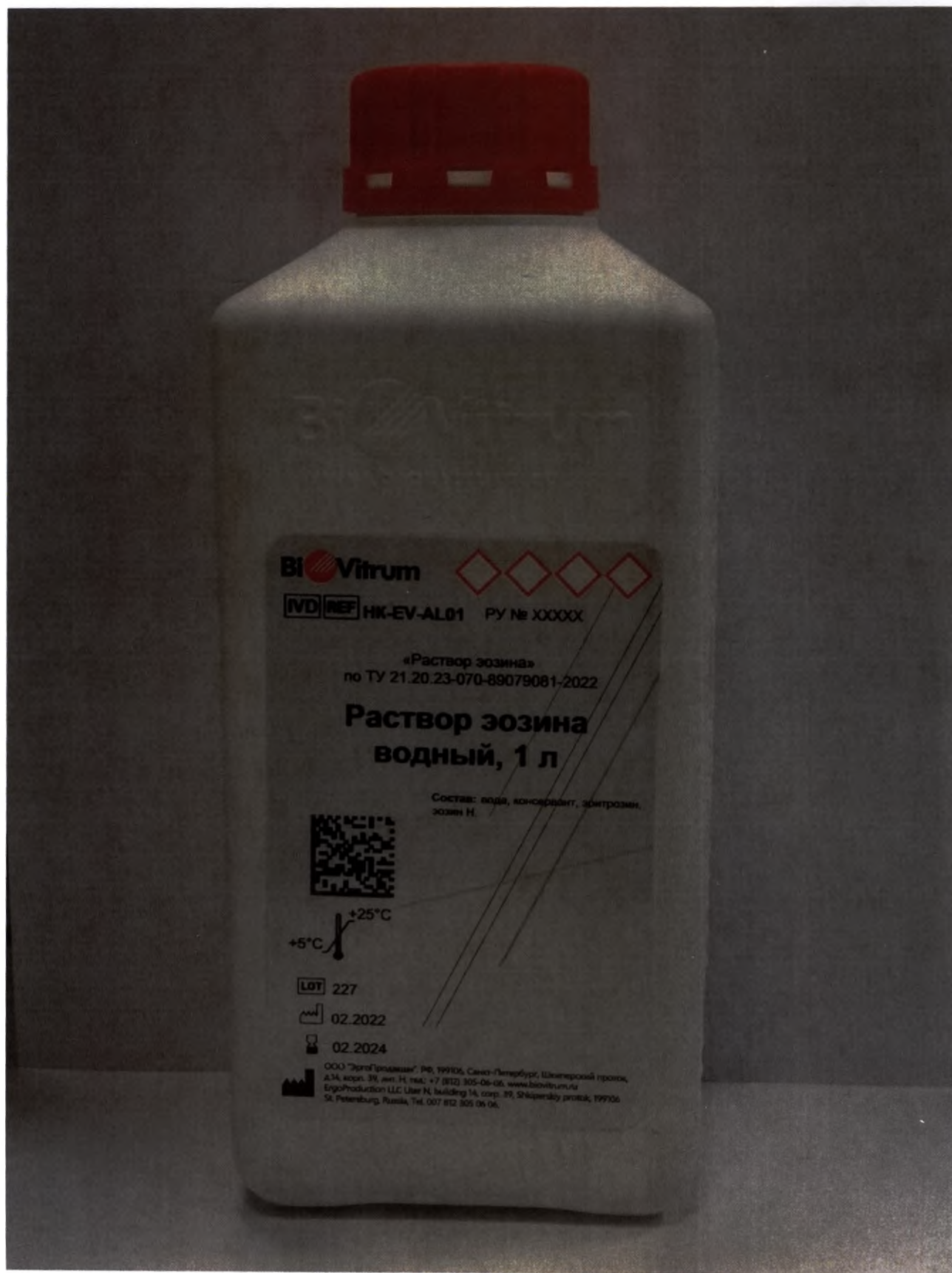


Фото 4. Образец внешнего вида упаковки Раствор эозина водный, 1л, оборотная сторона

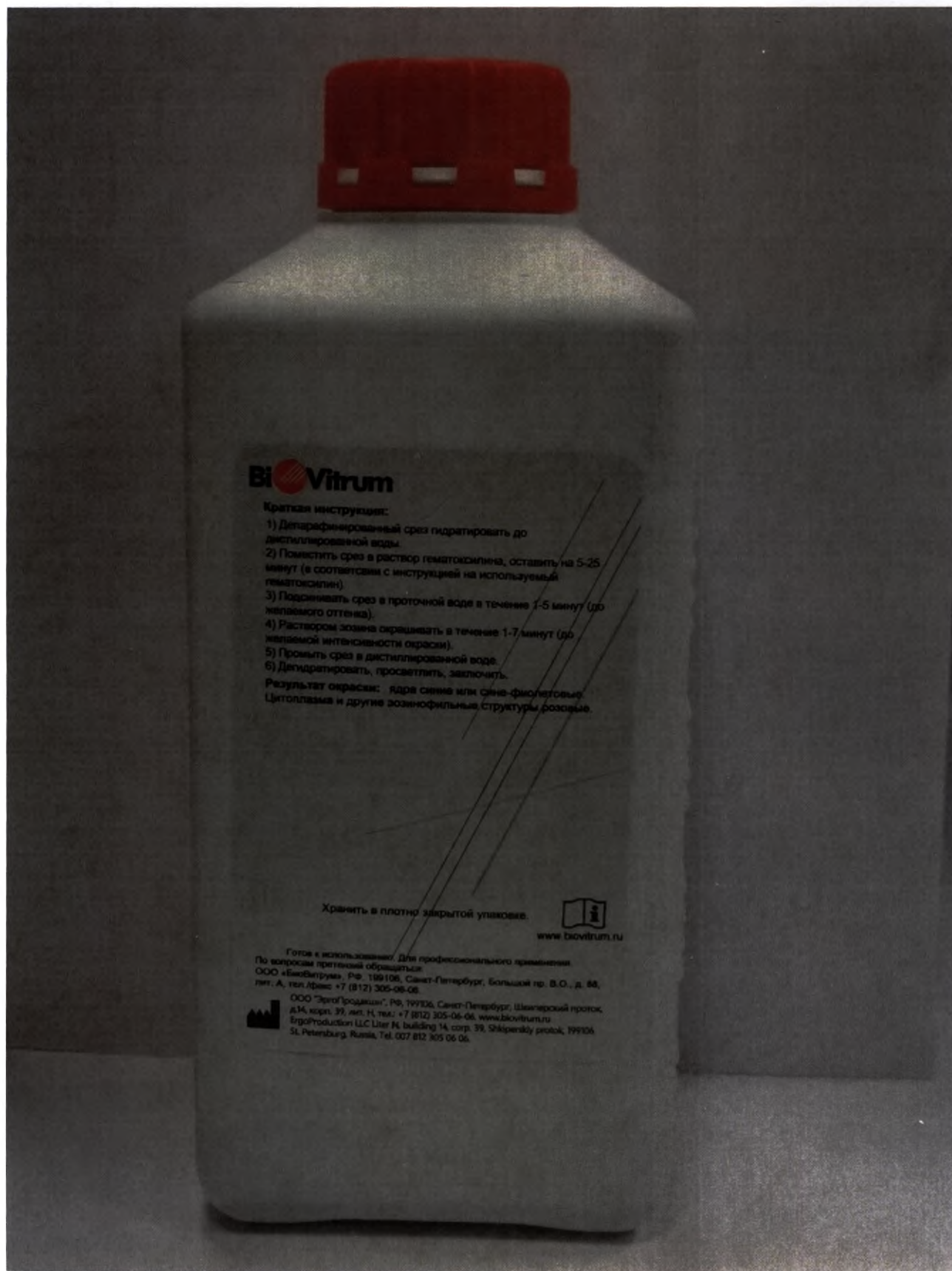


Фото 5. Образец внешнего вида упаковки. Раствор эозина спиртовой, 250 мл, вариант упаковки 1, вариант упаковки 2



Фото 6. Образец внешнего вида упаковки. Раствор эозина спиртовой, 500мл

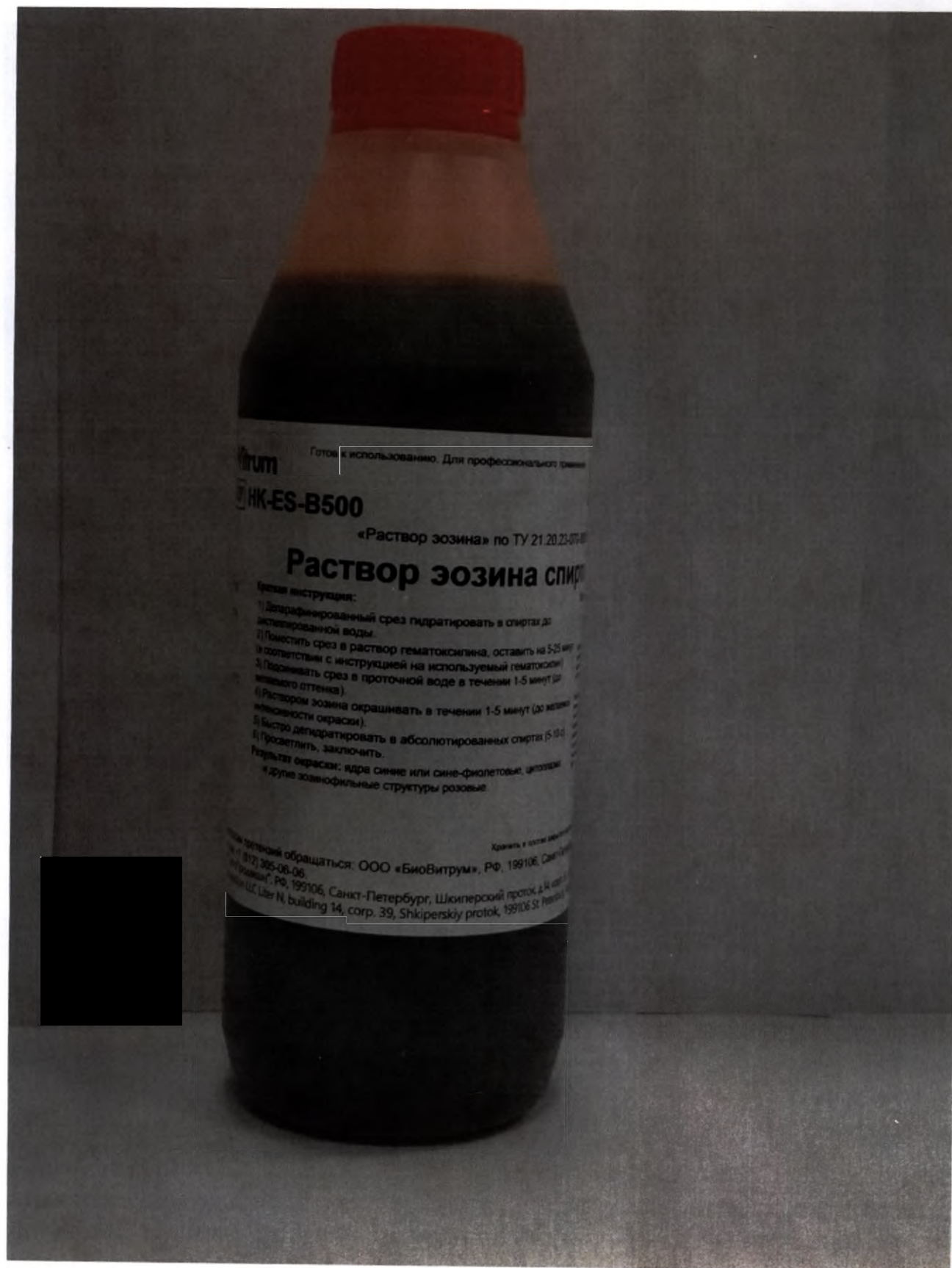


Фото 7. Образец внешнего вида упаковки. Раствор эозина спиртовой, 1л, лицевая сторона


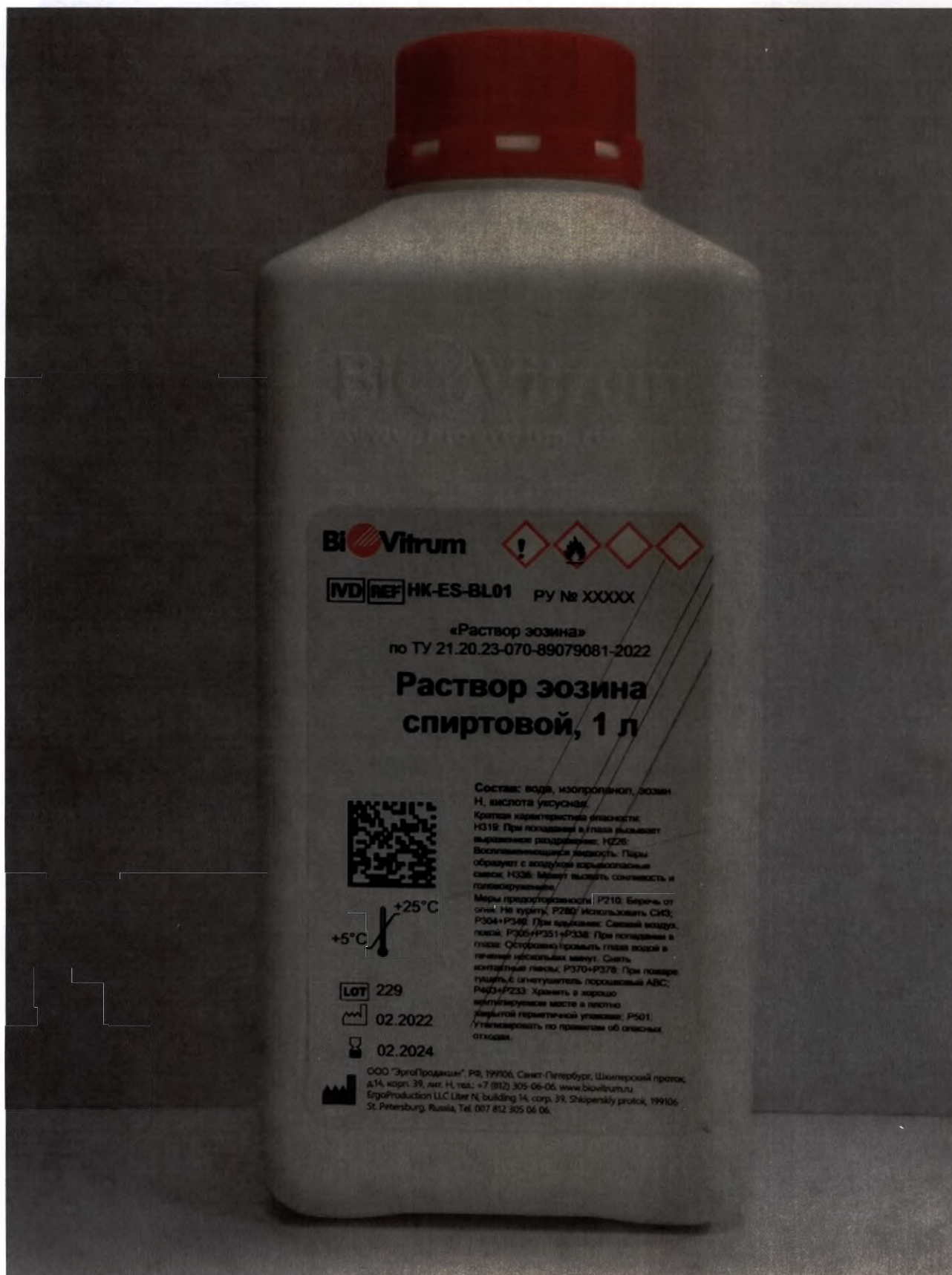


Фото 8. Образец внешнего вида упаковки Раствор эозина спиртовой, 1 л, обратная сторона



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 18
(Восемнадцать) лист(ов)

Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
"4" февраля 2022г.
Усейнов Д.В. Усейнов

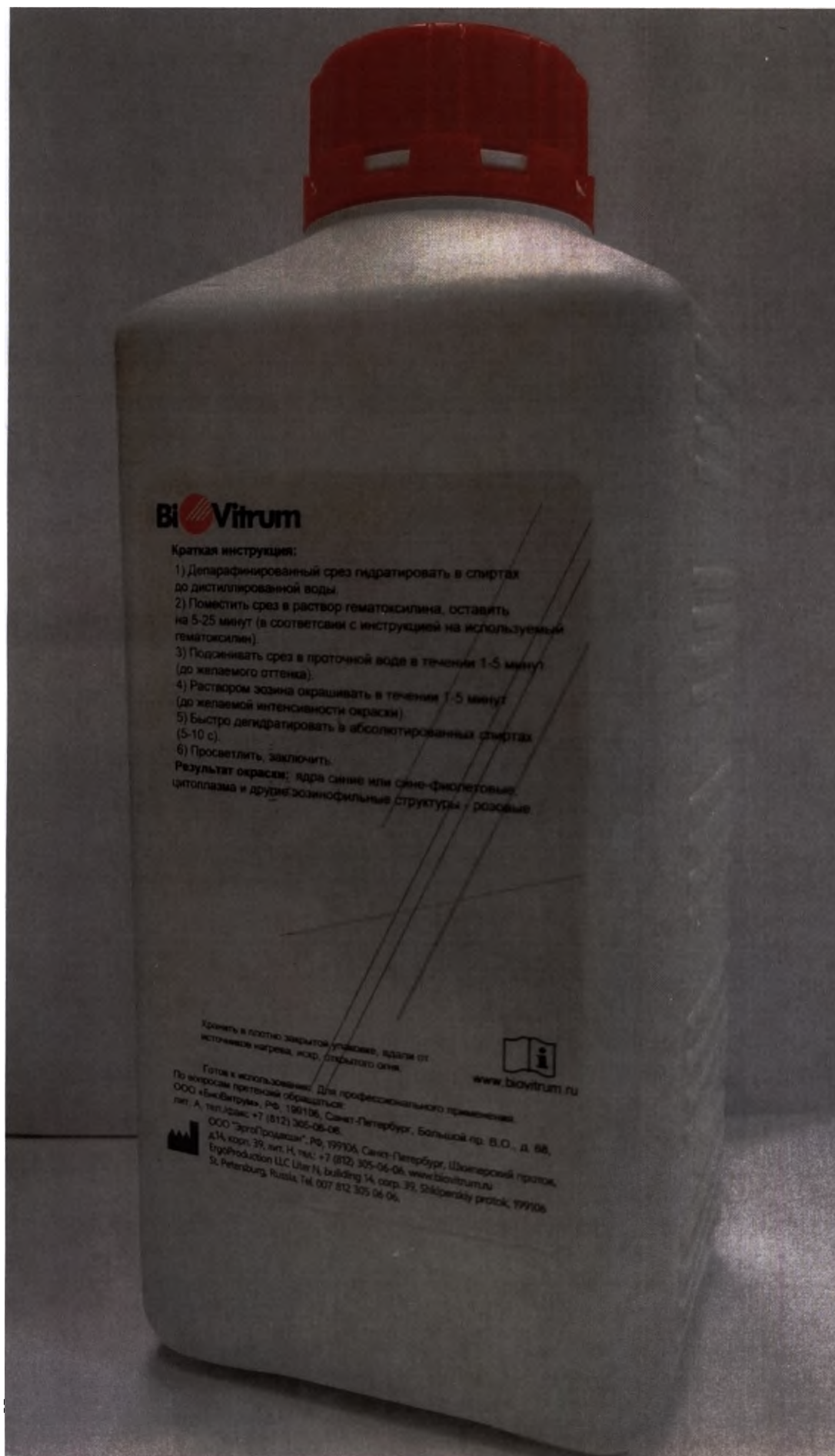