

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
Усейнов Д.В.



12 февраля 2022 г.

**Фотографические изображения, данные о
маркировке и упаковке медицинского изделия
“Раствор альцианового синего рН 2,5”
по ТУ 21.20.23-073-89079081-2022**

Содержание

1. Маркировка	3
2. Упаковка	7

1. Маркировка

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 31340-2013.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-073-89079081-2022, п.1.4.1 Маркировка первичной упаковки, п.1.4.2 Маркировка транспортной упаковки.

Раствор альцианового синего pH 2,5, 250 мл

Первичная упаковка: бутылка 250 мл

BioVITrum

IVD REF HK-AM-B250

Лот: XXXXX
MM.GGGT
YY.YYYY

+25°C
+5°C

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

«Раствор альцианового синего pH 2,5»
по ТУ 21.20.23-073-89079081-2022

Раствор альцианового синего pH 2,5, 250 мл

Краткая инструкция:

- 1) Дегазировать срез гидратировать до дистиллированной воды.
- 2) Поместить срез в раствор альцианового синего, оставить на 30 мин.
- 3) Быстро ополоснуть в дистиллированной воде (1-2 с).
- 4) Подсушить срез с помощью фильтровальной бумаги или салфетки.
- 5) Поместить срез в 5% водный раствор тетрабората натрия, оставить на 10 мин.
- 6) Промыть срез в дистиллированной воде.
- 7) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Результаты окраски: кислые мукополисахариды - цвет сине-зеленый.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.

ErgoProduction LLC, Liter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

www.biovitrum.ru

РЧ № XXXXXX



Состав: вода, диспота уксусная, альциановый синий. Краткая характеристика опасности: H319; H315. Меры предосторожности: P264; P280; P302+P352; P305+P351+P338; P332+P313; P337+P313.

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Раствор альцианового синего pH 2,5, 250 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-AM-B250

Лот: XXXXXX
MM.GGGT
MM.GGGT

При температурах выше 25°C - до трех суток

РЧ № XXXXXX

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

«Раствор альцианового синего pH 2,5» по ТУ 21.20.23-073-89079081-2022

Раствор альцианового синего pH 2,5, 250 мл

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____





По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн». РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Раствор альцианового синего pH 2,5, 500 мл

Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

BiVitrum	Готов к использованию. Для профессионального применения.		
IVD REF HK-AM-B500			РУ № XX.XXXX
LOT XXXXXX	«Раствор альцианового синего pH 2,5» по ТУ 21.20.23-073-89079081-2022		
XX.XXXX	Раствор альцианового синего pH 2,5, 500 мл		
YY.YYYY			
	Краткая инструкция: 1) Дегидратированный срез гидратировать до дистиллированной воды. 2) Поместить срез в раствор альцианового синего, оставить на 30 мин. 3) Быстро ополоснуть в дистиллированной воде (1-2 с). 4) Подсушить срез с помощью фильтровальной бумаги или салфетки. 5) Поместить срез в 5% водный раствор тетрабората натрия, оставить на 10 мин. 6) Промыть срез в дистиллированной воде. 7) Дегидратировать, просветлить, заключить. Результаты окраски: кислые мукополисахариды - цвет сине-зеленый.	Состав: вода, кислота уксусная, альциановый синий. Краткая характеристика опасности: H375: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. Меры предосторожности: P264/ После работы тщательно вымыть руки; P280/ Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут; P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой упаковке.	
	По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.		

Раствор альцианового синего pH 2,5, 500 мл

Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-AM-B500	Готов к использованию. Для профессионального применения.	
LOT XXXXXX	«Раствор альцианового синего pH 2,5» по ТУ 21.20.23-073-89079081-2022	
XX.XXXX	Раствор альцианового синего pH 2,5, 500 мл	
YY.YYYY		
РУ № XXXXXX	Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____ Масса нетто потребительской упаковки: _____	
По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru		

Раствор альцианового синего pH 2,5, 1 л

Первичная упаковка: бутылка, 1 л

BioVitrum 

IVD REF HK-AM-BL01 ПУ № xxxxxx

«Раствор альцианового синего pH 2,5»
по ТУ 21.20.23-073-89079081-2022

Раствор альцианового синего pH 2,5, 1 л



Состав: вода, кислота уксусная,
альциановый синий.

Краткая характеристика опасности: H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

Меры предосторожности: P264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Использовать СИЗ; P302+P352: При попадании на кожу: промыть большим количеством воды; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть глаза водой в течение нескольких минут; P333+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу; P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

+5°C / +25°C

LOT XXXXXX
XX.XXXX
YY.YYYY

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

BioVitrum

Краткая инструкция:

- 1) Дегидратированный срез гидратировать до дистиллированной воды.
- 2) Поместить срез в раствор альцианового синего, оставить на 30 мин.
- 3) Быстро ополоснуть в дистиллированной воде (1-2 с).
- 4) Подсушить срез с помощью фильтровальной бумаги или салфетки.
- 5) Поместить срез в 5% водный раствор тетрабората натрия, оставить на 10 мин.
- 6) Промыть срез в дистиллированной воде.
- 7) Дегидратировать, просветлить, заключить.

Результаты окраски: кислые мукополисахариды - цвет сине-зеленый.

 www.biovitrum.ru

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Готов к использованию. Для профессионального применения.

По вопросам претензий обращаться:
ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru
ErgoProduction LLC Ltr N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Раствор альцианового синего pH 2,5, 1 л

Этикетка на транспортную упаковку

Готов к использованию.
Для профессионального применения.

IVD REF HK-AM-BL01 

«Раствор альцианового синего pH 2,5» по ТУ 21.20.23-073-89079081-2022

Раствор альцианового синего pH 2,5, 1 л

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

LOT XXXXXX

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

ПУ № xxxxxx

+2°C / +30°C

При температурах выше 25°C - до трех суток.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

2. Упаковка

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-073-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-073-89079081-2022 п.1.5.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом и связаны с разными производителями данной упаковки и относятся к одному варианту исполнения изделия.

Допускается использование бутылки 1 л без рельефного логотипа "BioVitrum"

Фото 1. Образец внешнего вида упаковки. Раствор альцианового синего pH 2,5, 250 мл, Вариант упаковки 1, вариант упаковки 2.



Фото 2. Образец внешнего вида упаковки Раствор альцианового синего pH 2,5, 500 мл

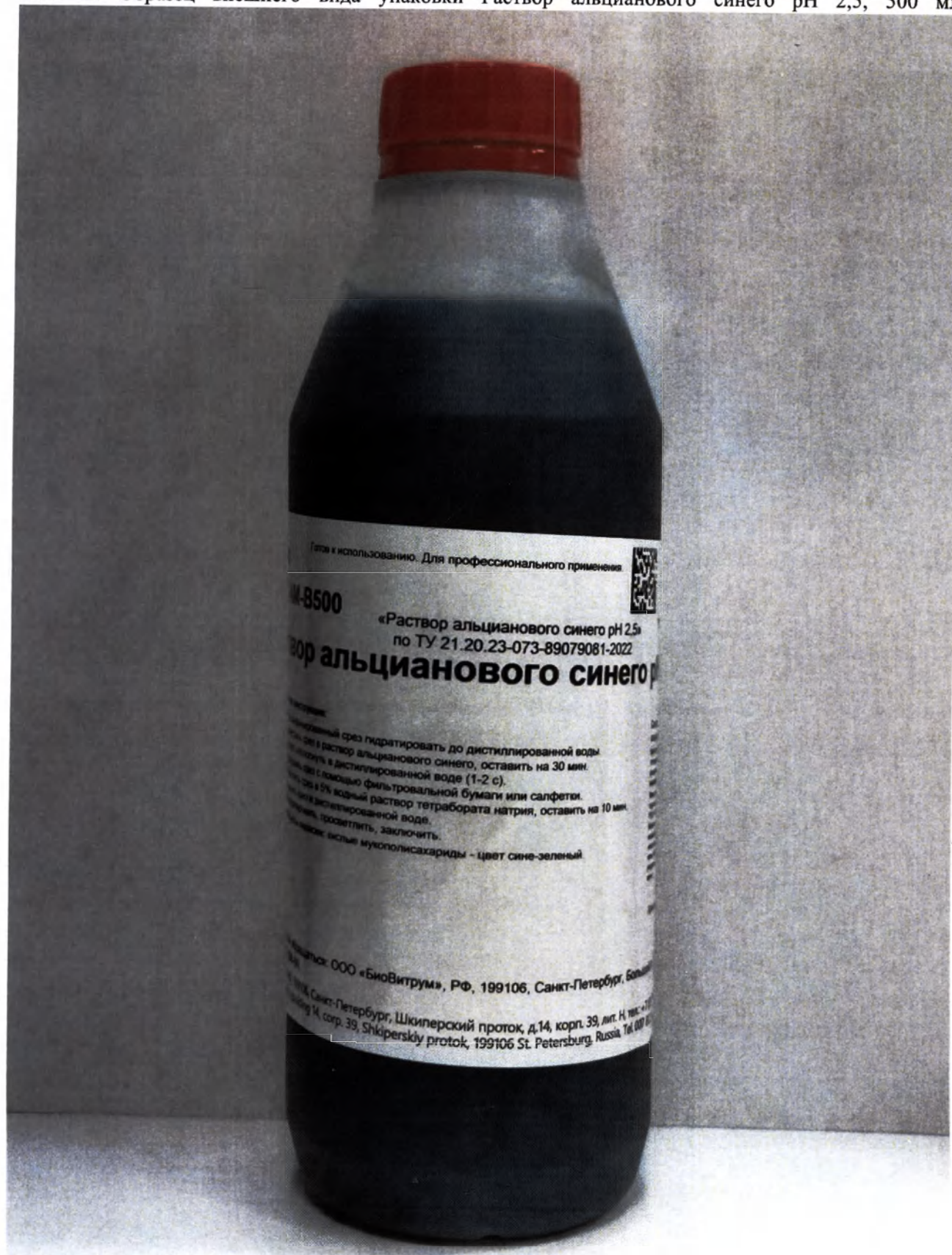


Фото 3. Образец внешнего вида упаковки. Раствор альцианового синего pH 2,5, 1 л, лицевая сторона


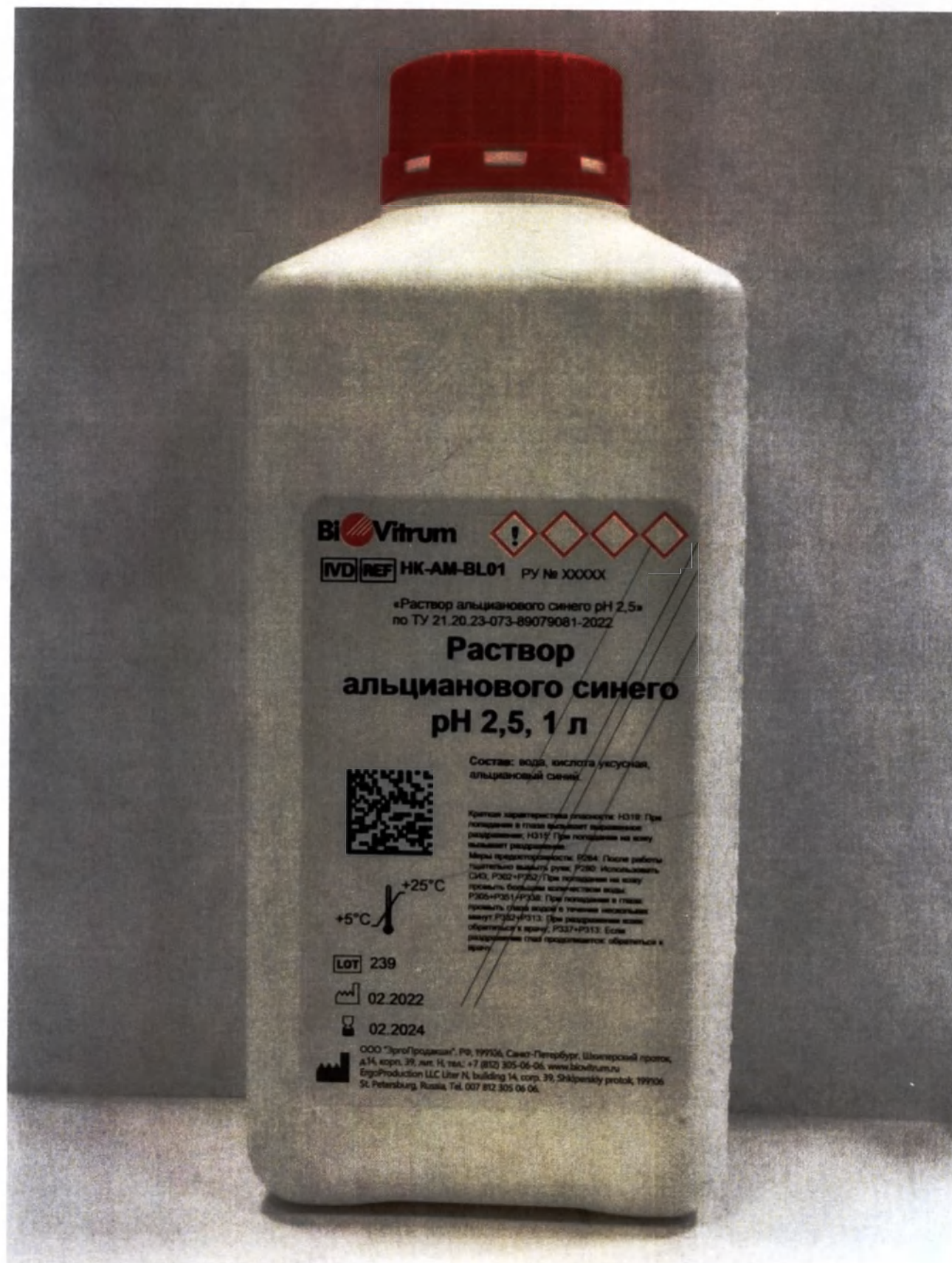


Фото 4. Образец внешнего вида упаковки. Раствор альцианового синего pH 2,5, 1 л, обратная сторона



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 11
(Ретинарчат) лист(ов)
Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
"12" декабрь 2022г.
Д.В. Усейнов

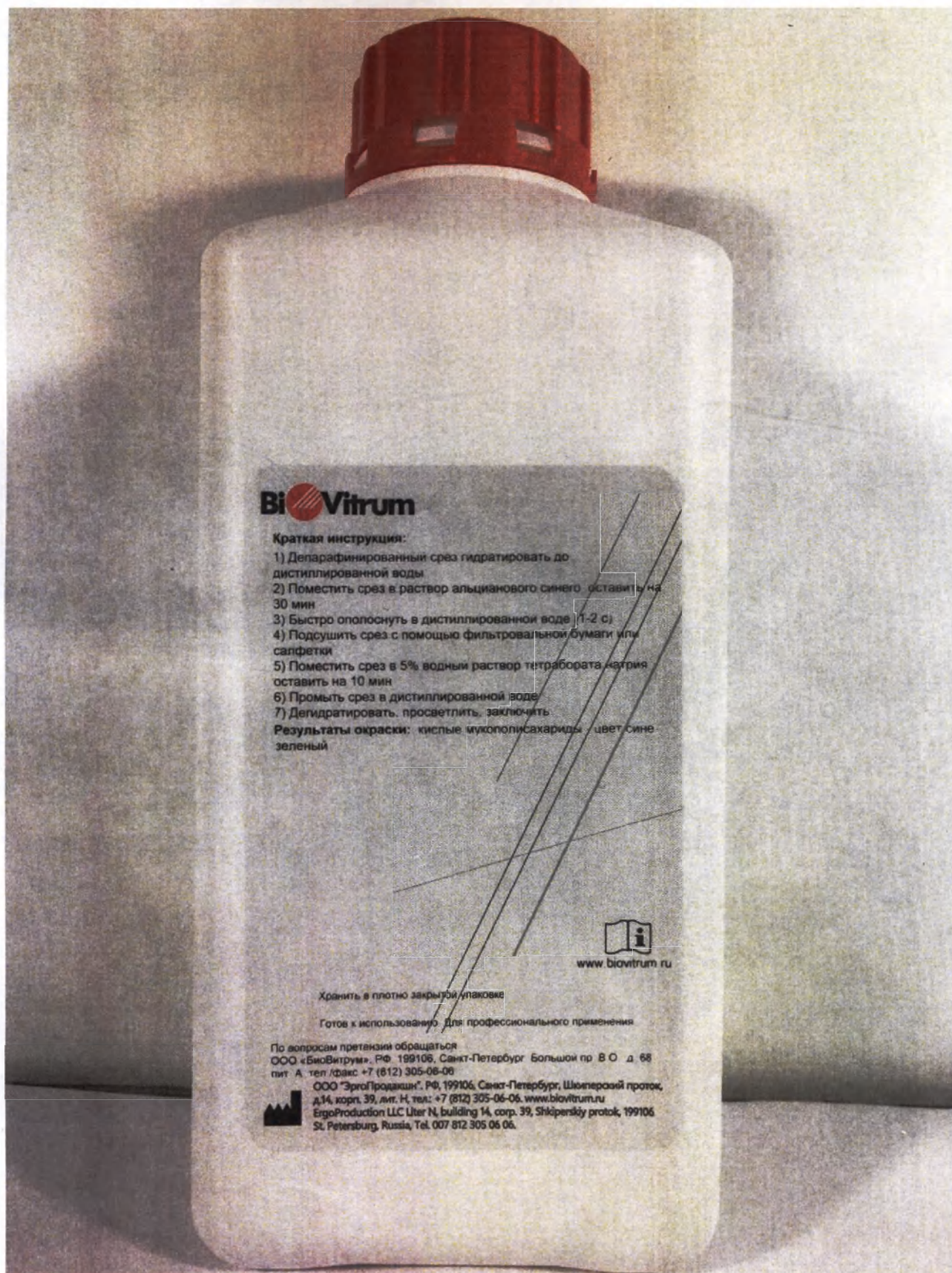