



“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

ООО "ЭргоПродакшн"

Усейнов Д.В.

1 февраля 2022 г.

**Фотографические изображения, данные о маркировке и упаковке
медицинского изделия**

«Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный»

по ТУ 21.20.23-072-89079081-2022

Содержание

1.	Маркировка	3
2.	Упаковка	6

1. Маркировка

При производстве изделия используются различные типы этикеток, в зависимости от типа упаковки. Маркировка выполнена согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ 14192-96, ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ 31340-2013.

Содержание маркировки упаковки соответствует ТУ 21.20.23-072-89079081-2022, п.1.4.1 Маркировка первичной упаковки, п.1.4.2 Маркировка транспортной упаковки.

Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 250 мл
 Первичная упаковка: бутылка, 250 мл

IVD REF НК-ЕК-А250

Для профессионального применения.
 «Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный»
 по ТУ 21.20.23-072-89079081-2022

РУ № XXXXXX

Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 250 мл

Краткая инструкция:
 1) Дистиллированная вода.
 2) Гематоксилин - 5-25 мин.
 3) Протоочная вода - 1-5 мин (до желаемого оттенка).
 4) Рабочий раствор эозина (концентрат разбавить 1:5-1:12 25% этанолом или 25% изопропанолом*) - 0,5-5 мин.
 5) Быстро декантировать в абсолютированных спиртах (5-10 с).
 6) Просветлить, заключить.
 Результат: ядро синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.
 *Приготовление 25% изопропанола: смешать 30 мл воды и 70 мл изопропанола.

Состав: вода, изопропанол, эозин Н, кислота уксусная.
 Краткая характеристика опасности: H318; H335; H336.
 Меры предосторожности: P210; P280; P304+P340; P305+P351+P338; P370+P378; P403+P233; P501.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс: +7 (812) 305-06-06.
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06.
 ErgoProduction LLC Uter N, building 14, corp. 39, Shkipersky protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.
www.biovitrum.ru

Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 250 мл
 Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF НК-ЕК-А250

Для профессионального применения.

«Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный» по ТУ 21.20.23-072-89079081-2022
Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 250 мл

LOT XXXXXX

+30°C

ММ.ГГГГ При температурах выше 25°C – до трех суток

ММ.ГГГГ

РУ № XXXXXX

Кол-во штук: _____

Масса нетто: _____

Масса брутто: _____

Масса нетто потребительской упаковки: _____

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06
 ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 500 мл
Первичная упаковка: бутылка, 500 мл

Для профессионального применения.

IVD REF HK-EK-A500

ПУ № XX.XXXX

«Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный» по ТУ 21.20.23-072-89079081-2022

Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 500 мл

LOT XXXXXX

XX.XXXX

YY.YYYY

+25°C

+5°C

www.biovitrum.ru

Краткая инструкция:

- 1) Деларифинированный срез гидратировать до дистиллированной воды.
- 2) Поместить срез в гематоксилин, оставить на 5-25 мин.
- 3) Подсинивать срез под проточной водопроводной водой, в течение 1-5 мин (до желаемого оттенка).
- 4) Поместить срез в рабочий раствор эозина (концентрат разбавить в соотношении 1:5-1:12 25% этанолом или 25% изопропанолом*), оставить на 0,5-5 мин.
- 5) Быстро дегидратировать в абсолютированных спиртах (5-10 с).
- 6) Просветлить, заключить.

Результаты: ядра синие или сине-фиолетовые, цитоплазма и другие эозинофильные структуры розовые.

*Приготовление 25% изопропанола: смешать 30 мл воды и 70 мл изопропанола.

Состав: вода, изопропанол, эозин H, кислота уксусная.

Краткая характеристика опасности:
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; H228: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасную смесь; H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

Меры предосторожности:
P210: Беречь от источников огня. Не курить; P280: Использовать СИЗ; P305+P351+P338: При попадании в глаза: промыть водой, снять контактные линзы; P370+P378: При пожаре тушить огнетушителем порошковым ABC; P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой упаковке; P501: Утилизировать по правилам об опасных отходах.

Хранить в плотно закрытой упаковке, вдали от источников нагрева, искр, открытого огня.

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06.

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, тел.: +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ErgoProduction LLC Liter N, building 14, corp. 39, Shkiperskiy protok, 199106 St. Petersburg, Russia, Tel. 007 812 305 06 06.

Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 500 мл
Этикетка на транспортную упаковку

IVD REF HK-EK-A500

Для профессионального применения.

«Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный» по ТУ 21.20.23-072-89079081-2022

Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 500 мл

LOT XXXXXX

MM.ГГГГ

MM.ГГГГ

+30°C

+2°C

www.biovitrum.ru

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

Масса нетто потребительской упаковки:

При температурах выше 25°C – до трех суток

ПУ № XXXXXX

По вопросам претензий обращаться: ООО «БиоВитрум», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06

ООО «ЭргоПродакшн», РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


5

2. Упаковка

Упаковка изделия осуществляется в соответствии с ТУ 21.20.23-072-89079081-2022. При производстве изделия используются различные типы упаковки, соответствующие требованиям ТУ 21.20.23-072-89079081-2022 п.1.5.

Различия вариантов упаковки 1 и 2 обусловлены внешним видом, связаны с разными производителями данной упаковки и относятся к одному варианту исполнения изделия.

Фото 2. Раствор эозина водно-спиртовой концентрированный, 500 мл.

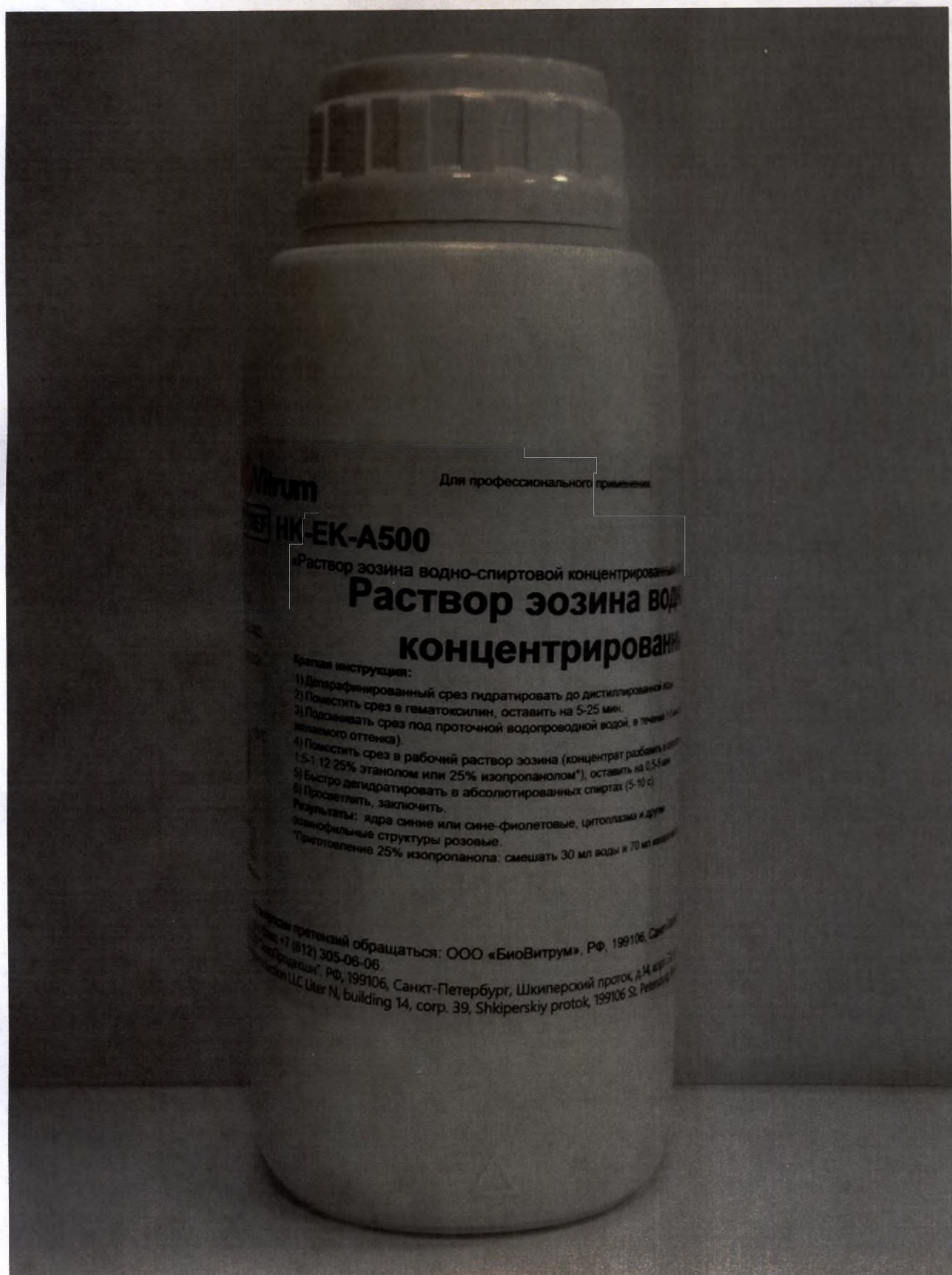

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 1
(1) лист(ов)

Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"
" 10.05.2022 " 2022г.

Д.В. Усейнов

