

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Компания ВиЦыАн»

В.Ю.Цыганков

9 ноября 2022 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Матрацы ортопедические

по ТУ 9396-006-97965187-2016

версия № 3 от 9 ноября 2022 г.

Оглавление

I. Описание и работа.....	3
1.1. Назначение изделия.....	3
1.2. Технические характеристики.....	3
1.3. Состав изделия.....	33
1.4. Устройство и работа.....	35
1.5. Маркировка.....	36
1.6.Упаковка.....	36
II.Показания к применению.....	37
III.Противопоказания к применению.....	38
IV.Использование по назначению.....	38
4.1. Эксплуатационные ограничения.....	38
4.2. Подготовка изделия к использованию.....	38
4.3. Использование изделия.....	38
V. Техническое обслуживание.....	39
VI. Хранение.....	39
6.1. Условия хранения.....	39
6.2. Гарантийные сроки хранения.....	39
VII. Транспортирование.....	39
VIII. Утилизация.....	39
IX. Контактные данные.....	40

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает эксплуатационные характеристики на матрацы ортопедические (далее матрацы), разработанные для помещения на опорную платформу для матраца кровати для создания удобной поверхности, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать. Матрацы способствуют равномерному распределению массы тела пациентов, а также тому, чтобы пациенты с заболеваниями спины занимали правильные для лечения позы.

I. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Матрацы разработаны для помещения на опорную платформу для матраца кровати для создания удобной поверхности, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать. Матрацы способствуют равномерному распределению массы тела пациентов, а также тому, чтобы пациенты с заболеваниями спины занимали правильные для лечения позы.

Область применения: травматология, ортопедия, вспомогательные и общепольничные медицинские изделия.

Возрастная группа пациентов определяется вариантом исполнения матраца (см таблицу 22 настоящего руководства по эксплуатации).

Матрацы применяются в лечебных учреждениях лицами, не имеющими медицинское образование.

1.2. Технические характеристики

Матрацы в зависимости от конструктивных особенностей подразделяются:

- 1) Матрацы ортопедические медицинские (далее МОМ);
- 2) Матрацы ортопедические медицинские (универсальные) (далее МОМ(У));
- 3) Матрацы ортопедические медицинские (двухсекционные) (далее МОМ(Д));
- 4) Матрацы ортопедические медицинские (трехсекционные) (далее МОМ(Т));
- 5) Матрацы ортопедические медицинские (четырёхсекционные) (далее МОМ(Ч));
- 6) Матрацы ортопедические медицинские "Спецпроф" №1 (далее МОМС1);
- 7) Матрацы ортопедические медицинские "Спецпроф" №2 (далее МОМС2);
- 8) Матрацы ортопедические медицинские "Спецпроф" №3 (далее МОМС3);
- 9) Матрацы ортопедические (с дифференцированным релаксирующим эффектом) (далее МО(СДРЭ));
- 10) Матрацы ортопедические (с релаксирующим эффектом) (далее МО(СРЭ));
- 11) Матрацы ортопедические мягкие (с эффектом памяти) (далее МОМ(СЭП));
- 12) Матрацы ортопедические (с массажным эффектом) (далее МО(СМЭ));
- 13) Матрацы ортопедические жесткие (с кокосовой койрой) (далее МОЖ(СКК));
- 14) Матрацы ортопедические жесткие (далее МОЖ);
- 15) Матрацы ортопедические жесткие (эконом) (далее МОЖ(Э));
- 16) Матрацы ортопедические эргономичные (далее МОЭ);
- 17) Матрацы ортопедические эргономичные (с зональным латексом) (далее МОЭ(СЗЛ)).

Матрацы в зависимости от количества блоков одного матраца делятся на:

-одноблочные;

-двухблочные (только МОМС1).

Двухблочность означает, что каждый блок матраца находится в отдельном чехле.

Матрацы в зависимости от внутренней формы одного блока делятся на:

-цельные (МОМ, МОМ(У), МОМС1, МОМС2, МОМС3, МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОЖ и МОЖ(Э));

-из двух вертикальных секций (МОМ(Д));

-из трех вертикальных секций (МОМ(Т));

-из четырех вертикальных секций (МОМ(Ч));

-из двух горизонтальных секций (МОЭ);

-из трех горизонтальных секций (МО(СМЭ), МОЖ(СКК) и МОЭ(СЗЛ));

-из четырех горизонтальных секций (МОМ(СЭП)).

Матрацы в зависимости от рабочей (мягкой) стороны делятся на:

-односторонние (МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОМ(СЭП), МО(СМЭ), МОЭ и МОЭ(СЗЛ));

-двухсторонние (МОМ, МОМ(У), МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОМС2, МОМС3, МОЖ(СКК), МОЖ и МОЖ(Э)).

На сам матрац с односторонней рабочей (мягкой) стороной наклеивают этикетку "вверх" с этой стороны.

Матрацы в зависимости от расположения головы пациента на одном из краев рабочей (мягкой) стороны разделяют на:

- с одним рабочим краем (МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОЭ и МОЭ(СЗЛ));
- с двумя рабочими краями (не принципиально расположение головы).

На сам матрац с одним рабочим краем рабочей (мягкой) стороны наклеивают этикетку "голова" на этот край стороны.

Матрацы в зависимости от формы плоскости наполнителя рабочей (мягкой) стороны делятся на:

-плоские (МОМ, МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОМС2, МОМС3, МОМ(СЭП), МОЖ(СКК), МОЖ и МОЖ(Э));

-трапециевидные (МОМ(У), МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОЭ);

-волнистые (МО(СМЭ));

-смешанные (волнистые и трапециевидные) (МОЭ(СЗЛ)).

Матрацы в зависимости от высоты (толщины) в мм, делятся на:

-до 100 вкл. (МОМ, МОМ(У), МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1*, МОМС2, МОМС3, МО(СРЭ) и МОЖ(Э));

-свыше 100 (МОМС1*, МО(СДРЭ), МОМ(СЭП), МО(СМЭ), МОЖ(СКК), МОЖ, МОЭ и МОЭ(СЗЛ)).

* МОМС1 двухблочный, один блок матраца по высоте менее 100 мм, а другой блок матрацы выше 100 мм.

Матрацы применяются с жестким основанием.

Сведения о номенклатуре (артикулы и номера конструкторской документации), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМ представлены таблице № 1.

Таблица № 1. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМ.

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-М1-ПК-01	2000x800x100	4,0	0,49	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-02	1900x700x80	2,7	0,40	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-03	1900x800x80	3,1	0,45	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-04	1900x840x80	3,3	0,47	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-05	2000x700x80	2,9	0,42	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-06	1200x640x50	1,1	0,23	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-07	760x670x30	0,5	0,15	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-08	1900x840x100	4,0	0,49	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-09	2000x840x100	4,2	0,51	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-10	2000x840x80	3,5	0,50	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-11	1900x800x100	3,8	0,47	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-12	2000x900x80	3,7	0,53	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-13	2000x900x100	4,5	0,54	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-14	1950x800x100	3,9	0,48	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-15	1950x900x100	4,4	0,53	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-16	1400x600x80	1,7	0,26	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-17	1400x700x60	1,6	0,29	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-18	1200x600x60	1,2	0,22	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-19	1250x650x80	1,7	0,25	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-20	1800x700x80	2,6	0,38	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-21	800x450x50	0,5	0,11	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-22	1600x700x60	1,8	0,33	ПК

ВиЦыАн-М1-ПК-23	980x700x40	0,8	0,20	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-24	490x590x20	0,2	0,09	ПК
ВиЦыАн-М1-ПК-25	710x630x20	0,3	0,13	ПК
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-01	2000x800x100	4,3	0,76	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-02	1900x700x80	3,0	0,63	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-03	1900x800x80	3,4	0,71	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-04	1900x840x80	3,5	0,74	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-05	2000x700x80	3,1	0,66	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-06	1200x640x50	1,2	0,36	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-07	760x670x30	0,6	0,23	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-08	1900x840x100	4,3	0,76	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-09	2000x840x100	4,5	0,80	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-10	2000x840x80	3,7	0,77	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-11	1900x800x100	4,1	0,73	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-12	2000x900x80	4,0	0,82	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-13	2000x900x100	4,8	0,85	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-14	1950x800x100	4,2	0,74	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-15	1950x900x100	4,7	0,83	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-16	1400x600x80	1,9	0,41	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-17	1400x700x60	1,7	0,45	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-18	1200x600x60	1,3	0,34	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-19	1250x650x80	1,8	0,40	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-20	1800x700x80	2,8	0,60	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-21	800x450x50	0,6	0,18	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-22	1600x700x60	2,0	0,51	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-23	980x700x40	0,9	0,31	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-24	490x590x20	0,3	0,13	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-25	710x630x20	0,4	0,20	ТК-1/1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-01	2000x800x100	1,9	0,38	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-02	1900x700x80	2,8	0,46	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-03	1900x800x80	3,2	0,52	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-04	1900x840x80	3,3	0,54	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-05	2000x700x80	2,9	0,48	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-06	1200x640x50	1,1	0,26	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-07	760x670x30	0,5	0,17	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-08	1900x840x100	4,1	0,56	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-09	2000x840x100	4,3	0,58	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-10	2000x840x80	3,5	0,57	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-11	1900x800x100	3,9	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-12	2000x900x80	3,8	0,60	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-13	2000x900x100	4,6	0,62	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-14	1950x800x100	4,0	0,55	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-15	1950x900x100	4,5	0,61	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-16	1400x600x80	1,8	0,30	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-17	1400x700x60	1,6	0,33	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-18	1200x600x60	1,2	0,25	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-19	1250x650x80	1,7	0,29	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-20	1800x700x80	2,7	0,44	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-21	800x450x50	0,5	0,13	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-22	1600x700x60	4,1	0,56	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-23	980x700x40	0,8	0,23	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-12-24	490x590x20	0,2	0,10	ТК-12

ВиЦыАн-М1-ТК-12-25	710х630х20	0,3	0,15	ТК-12
ВиЦыАн-М1-ТК-4-01	2000х800х100	2,3	0,79	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-02	1900х700х80	3,3	0,96	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-03	1900х800х80	3,8	1,08	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-04	1900х840х80	3,9	1,13	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-05	2000х700х80	3,5	1,01	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-06	1200х640х50	1,4	0,55	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-07	760х670х30	0,7	0,36	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-08	1900х840х100	4,7	1,17	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-09	2000х840х100	4,9	1,22	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-10	2000х840х80	4,1	1,19	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-11	1900х800х100	4,5	1,12	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-12	2000х900х80	4,4	1,27	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-13	2000х900х100	5,3	1,30	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-14	1950х800х100	4,6	1,15	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-15	1950х900х100	5,1	1,27	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-16	1400х600х80	2,1	0,63	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-17	1400х700х60	2,0	0,70	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-18	1200х600х60	1,5	0,53	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-19	1250х650х80	2,0	0,61	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-20	1800х700х80	3,1	0,92	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-21	800х450х50	0,7	0,27	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-22	1600х700х60	4,7	1,17	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-23	980х700х40	1,1	0,48	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-24	490х590х20	0,3	0,21	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-4-25	710х630х20	0,5	0,31	ТК-4
ВиЦыАн-М1-ТК-7-01	2000х800х100	1,8	0,33	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-02	1900х700х80	2,7	0,40	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-03	1900х800х80	3,1	0,45	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-04	1900х840х80	3,3	0,47	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-05	2000х700х80	2,9	0,42	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-06	1200х640х50	1,1	0,23	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-07	760х670х30	0,5	0,15	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-08	1900х840х100	4,0	0,49	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-09	2000х840х100	4,2	0,51	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-10	2000х840х80	3,5	0,50	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-11	1900х800х100	3,8	0,47	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-12	2000х900х80	3,7	0,53	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-13	2000х900х100	4,5	0,54	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-14	1950х800х100	3,9	0,48	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-15	1950х900х100	4,4	0,53	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-16	1400х600х80	1,7	0,26	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-17	1400х700х60	1,6	0,29	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-18	1200х600х60	1,2	0,22	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-19	1250х650х80	1,7	0,25	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-20	1800х700х80	2,6	0,38	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-21	800х450х50	0,5	0,11	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-22	1600х700х60	4,0	0,49	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-23	980х700х40	0,8	0,20	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-24	490х590х20	0,2	0,09	ТК-7
ВиЦыАн-М1-ТК-7-25	710х630х20	0,3	0,13	ТК-7

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для MOM представлены таблице № 1.1.

Таблица № 1.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-М1-ПК-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-06	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-07	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-16	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-17	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-18	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-19	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-20	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ПК-21	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-22	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-23	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-24	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ПК-25	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-06	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-07	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-16	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-17	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-18	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-19	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-20	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-21	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-22	2	14*2	2

ВиЦыАн-М1-ТК1/1-23	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-24	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК1/1-25	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-06	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-07	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-16	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-17	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-18	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-19	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-20	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-12-21	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-22	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-23	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-24	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-12-25	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-06	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-07	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-16	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-17	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-18	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-19	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-20	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-4-21	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-22	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-23	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-4-24	2	14*2	2

ВиЦыАн-М1-ТК-4-25	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-06	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-07	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-16	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-17	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-18	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-19	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-20	4	14*4	1
ВиЦыАн-М1-ТК-7-21	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-22	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-23	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-24	2	14*2	2
ВиЦыАн-М1-ТК-7-25	2	14*2	2

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOM (У) представлены таблице № 2.

Таблица № 2 Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOM (У).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-01	2000x800x80	3,96	0,76	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-02	2000x850x80	4,20	0,80	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-03	2000x900x80	4,44	0,84	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-04	1950x700x80	3,39	0,66	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-05	1950x800x80	3,86	0,74	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-06	1950x840x80	4,05	0,77	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-07	1950x900x80	4,33	0,82	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-08	1980x800x80	3,92	0,75	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-09	2000x800x100	4,78	0,78	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-10	2000x850x100	5,07	0,82	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-11	2000x900x100	5,37	0,87	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-12	1950x700x100	4,09	0,68	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-13	1950x800x100	4,66	0,76	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-14	1950x840x100	4,89	0,80	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-15	1950x900x100	5,23	0,85	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-16	1980x800x100	4,73	0,77	ТК-1/1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-01	2000x800x80	3,73	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-02	2000x850x80	3,96	0,56	ТК-12

ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-03	2000x900x80	4,19	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-04	1950x700x80	3,19	0,46	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-05	1950x800x80	3,64	0,52	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-06	1950x840x80	3,82	0,54	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-07	1950x900x80	4,09	0,58	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-08	1980x800x80	3,69	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-09	2000x800x100	4,55	0,55	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-10	2000x850x100	4,83	0,58	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-11	2000x900x100	5,11	0,61	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-12	1950x700x100	3,89	0,48	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-13	1950x800x100	4,43	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-14	1950x840x100	4,65	0,56	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-15	1950x900x100	4,98	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-16	1980x800x100	4,50	0,54	ТК-12
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-01	2000x800x80	4,34	1,14	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-02	2000x850x80	4,60	1,20	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-03	2000x900x80	4,87	1,27	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-04	1950x700x80	3,72	0,99	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-05	1950x800x80	4,23	1,11	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-06	1950x840x80	4,44	1,16	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-07	1950x900x80	4,75	1,24	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-08	1980x800x80	4,30	1,13	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-09	2000x800x100	5,17	1,17	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-10	2000x850x100	5,49	1,24	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-11	2000x900x100	5,80	1,30	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-12	1950x700x100	4,43	1,02	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-13	1950x800x100	5,05	1,15	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-14	1950x840x100	5,29	1,20	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-15	1950x900x100	5,66	1,27	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-16	1980x800x100	5,12	1,16	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-01	2000x800x80	3,67	0,47	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-02	2000x850x80	3,90	0,50	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-03	2000x900x80	4,13	0,53	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-04	1950x700x80	3,14	0,41	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-05	1950x800x80	3,58	0,46	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-06	1950x840x80	3,76	0,48	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-07	1950x900x80	4,03	0,52	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-08	1980x800x80	3,64	0,47	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-09	2000x800x100	4,49	0,49	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-10	2000x850x100	4,77	0,52	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-11	2000x900x100	5,04	0,54	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-12	1950x700x100	3,84	0,42	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-13	1950x800x100	4,38	0,48	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-14	1950x840x100	4,59	0,50	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-15	1950x900x100	4,92	0,53	ТК-7
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-16	1980x800x100	4,44	0,48	ТК-7

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема из размещения для МОМ (У) представлены в таблице №2.1.

Таблица 2.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-1/1-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-12-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-4-16	4	14*4	1

ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-ММ-ФК-ТК-7-16	4	14*4	1

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМ (Д) представлены таблице № 3.

Таблица № 3. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМ (Д).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца в кг	Масса чехла в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-М2-ТК-12-01	1950х700х80	2,9	0,46	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-12-02	1950х800х80	3,3	0,52	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-12-03	2000х900х80	3,8	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-12-04	1950х700х100	3,5	0,48	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-12-05	1950х800х100	4,0	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-12-06	2000х900х100	4,6	0,61	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-12-07	2000х900х80	3,8	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-12-08	1900х800х100	3,9	0,52	ТК-12
ВиЦыАн-М2-ТК-4-01	1950х700х80	3,4	0,99	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-4-02	1950х800х80	3,9	1,11	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-4-03	2000х900х80	4,4	1,27	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-4-04	1950х700х100	4,0	1,02	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-4-05	1950х800х100	4,6	1,15	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-4-06	2000х900х100	5,3	1,30	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-4-07	2000х900х80	4,4	1,27	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-4-08	1900х800х100	4,5	1,12	ТК-4
ВиЦыАн-М2-ТК-7-01	1950х700х80	2,8	0,41	ТК-7
ВиЦыАн-М2-ТК-7-02	1950х800х80	3,2	0,46	ТК-7
ВиЦыАн-М2-ТК-7-03	2000х900х80	3,7	0,53	ТК-7
ВиЦыАн-М2-ТК-7-04	1950х700х100	3,4	0,42	ТК-7
ВиЦыАн-М2-ТК-7-05	1950х800х100	3,9	0,48	ТК-7
ВиЦыАн-М2-ТК-7-06	2000х900х100	4,5	0,54	ТК-7
ВиЦыАн-М2-ТК-7-07	2000х900х80	3,7	0,53	ТК-7
ВиЦыАн-М2-ТК-7-08	1900х800х100	3,8	0,47	ТК-7

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема из размещения для МОМ (Д) представлены в таблице №3.1

Таблица 3.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-М2-ТК-12-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-12-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-12-03	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-12-04	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-12-05	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-12-06	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-12-07	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-12-08	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-03	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-04	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-05	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-06	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-07	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-4-08	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-03	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-04	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-05	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-06	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-07	4	14*4	6
ВиЦыАн-М2-ТК-7-08	4	14*4	6

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOM(Т) представлены таблице № 4.

Таблица № 4. Номенклатура (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOM (Т).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матрацев кг	Масса чехла в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-М3-ТК-12-01	2000х800х80	3,3	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-М3-ТК-12-02	2000х800х100	4,1	0,55	ТК-12
ВиЦыАн-М3-ТК-4-01	2000х800х80	4,0	1,14	ТК-4
ВиЦыАн-М3-ТК-4-02	2000х800х100	4,7	1,17	ТК-4
ВиЦыАн-М3-ТК-7-01	2000х800х80	3,3	0,47	ТК-7
ВиЦыАн-М3-ТК-7-02	2000х800х100	4,0	0,49	ТК-7

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схемах их размещения для MOM (Т) представлены в таблице № 4.1.

Таблица № 4.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-М3-ТК-12-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М3-ТК-12-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М3-ТК-4-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М3-ТК-4-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М3-ТК-7-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М3-ТК-7-02	4	14*4	6

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOM(Ч) представлены таблице № 5.

Таблица № 5. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOM (Ч).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-М4-ТК-12-01	1980x800x80	3,3	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-М4-ТК-12-02	1980x800x100	4,0	0,54	ТК-12
ВиЦыАн-М4-ТК-12-03	2000x900x80	3,8	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-М4-ТК-12-04	2000x900x100	4,6	0,61	ТК-12
ВиЦыАн-М4-ТК-4-01	1980x800x80	3,9	1,13	ТК-4
ВиЦыАн-М4-ТК-4-02	1980x800x100	4,6	1,16	ТК-4
ВиЦыАн-М4-ТК-4-03	2000x900x80	4,4	1,27	ТК-4
ВиЦыАн-М4-ТК-4-04	2000x900x100	5,3	1,30	ТК-4
ВиЦыАн-М4-ТК-7-01	1980x800x80	3,3	0,47	ТК-7
ВиЦыАн-М4-ТК-7-02	1980x800x100	4,0	0,48	ТК-7
ВиЦыАн-М4-ТК-7-03	2000x900x80	3,7	0,53	ТК-7
ВиЦыАн-М4-ТК-7-04	2000x900x100	4,5	0,54	ТК-7

Сведения о количестве ручек, размере и схема их размещения для MOM (Ч) предоставлены в таблице № 5.1

Таблица 5.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-М4-ТК-12-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-12-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-12-03	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-12-04	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-4-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-4-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-4-03	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-4-04	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-7-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-7-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-7-03	4	14*4	6
ВиЦыАн-М4-ТК-7-04	4	14*4	6

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOMC1 представлены таблице № 6.

Таблица № 6. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла MOMC1.

Артикул	Размеры: -габаритные размеры (ДхШ), в мм; -высота частей h и h1, в мм; -радиусы r и r1, в мм.	Масса матраца в кг	Масса чехла в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ММ-АК-01	1)1900x700; 2)80 и 160; 3)130 и 70.	5,63	1,09	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-АК-02	1)2365x660; 2)80 и 160; 3)125 и 50.	6,22	1,69	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-АК-03	1)1950x820;	6,44	1,27	ТК-4

	2)80 и 160; 3)130 и 70.			
ВиЦыАн-ММ-АК-04	1)1860х750; 2)80 и 160; 3)130 и 70.	5,62	1,13	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-АК-05	1)1870х750; 2)50 и 175; 3)130 и 70.	5,32	1,11	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-АК-06	1)2000х820; 2)100 и 140; 3)130 и 70.	6,65	1,30	ТК-4

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для МОМС1 представлены в таблице № 6.1.

Таблица № 6.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ММ-АК-01	4	14*4	6
ВиЦыАн-ММ-АК-02	4	14*4	6
ВиЦыАн-ММ-АК-03	4	14*4	6
ВиЦыАн-ММ-АК-04	4	14*4	6
ВиЦыАн-ММ-АК-05	4	14*4	6
ВиЦыАн-ММ-АК-06	4	14*4	6

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМС2 представлены таблице №7.

Таблица № 7. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМС2.

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ММ-ОПС-01	2000х500х50	1,81	0,71	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ОПС-02	2000х650х50	2,33	0,90	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ОПС-03	2000х750х50	2,68	1,03	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ОПС-04	2000х1000х50	3,54	1,34	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ОПС-05	2100х500х50	1,90	0,75	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-ОПС-06	1700х500х50	1,54	0,61	ТК-4

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для МОМС2 представлены в таблице №7.1.

Таблица № 7.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ММ-ОПС-01	4	14*3	1
ВиЦыАн-ММ-ОПС-02	4	14*3	1
ВиЦыАн-ММ-ОПС-03	4	14*3	1
ВиЦыАн-ММ-ОПС-04	4	14*3	1
ВиЦыАн-ММ-ОПС-05	4	14*3	1
ВиЦыАн-ММ-ОПС-06	4	14*3	1

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМС3 представлены таблице № 8.

Таблица № 8. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМС3.

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца в кг	Масса чехла в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ММ-КАТ-01	2000х600х50	2,16	0,84	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-КАТ-02	1800х600х50	1,94	0,76	ТК-4
ВиЦыАн-ММ-КАТ-03	1800х500х50	1,63	0,64	ТК-4

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для МОМС3 представлены в таблице №8.1.

Таблица №8.1.

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ММ-КАТ-01	4	14*3	1
ВиЦыАн-ММ-КАТ-02	4	14*3	1
ВиЦыАн-ММ-КАТ-03	4	14*3	1

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МО(СДРЭ) представлены таблице № 9.

Таблица № 9. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МО(СДРЭ).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца в кг	Масса чехла кг	Тип чехла
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-01	2000х800х120	5,36	0,56	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-02	2000х900х120	6,02	0,62	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-03	1950х800х120	5,23	0,55	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-04	1950х900х120	5,87	0,61	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-05	1900х800х120	5,10	0,54	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-06	1900х900х120	5,72	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-07	2000х1200х120	8,00	0,80	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-08	1950х1200х120	7,81	0,79	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-09	1900х1200х120	7,61	0,77	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-10	2000х1400х120	9,33	0,93	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-11	1950х1400х120	9,09	0,90	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-12	1900х1400х120	8,86	0,88	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-13	2000х1600х120	10,65	1,05	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-14	1950х1600х120	10,38	1,02	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-15	1900х1600х120	10,12	1,00	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-16	2000х1800х120	11,97	1,17	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-17	1950х1800х120	11,67	1,14	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-18	1900х1800х120	11,37	1,11	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-19	1200х650х120	2,44	0,28	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-20	1250х700х120	2,74	0,31	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-21	1400х700х120	3,30	0,36	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-22	1600х800х120	4,30	0,46	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-23	2000х2000х120	13,29	1,29	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-01	2000х800х120	5,60	0,80	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-02	2000х900х120	6,29	0,89	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-03	1950х800х120	5,47	0,79	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-04	1950х900х120	6,13	0,87	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-05	1900х800х120	5,33	0,77	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-06	1900х900х120	5,98	0,85	ТК-1/1

ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-07	2000x1200x120	8,35	1,15	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-08	1950x1200x120	8,14	1,12	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-09	1900x1200x120	7,94	1,10	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-10	2000x1400x120	9,72	1,32	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-11	1950x1400x120	9,48	1,29	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-12	1900x1400x120	9,24	1,26	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-13	2000x1600x120	11,10	1,50	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-14	1950x1600x120	10,82	1,46	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-15	1900x1600x120	10,55	1,43	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-16	2000x1800x120	12,47	1,67	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-17	1950x1800x120	12,16	1,63	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-18	1900x1800x120	11,85	1,59	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-19	1200x650x120	2,55	0,39	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-20	1250x700x120	2,88	0,44	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-21	1400x700x120	3,46	0,52	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-22	1600x800x120	4,49	0,65	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-23	2000x2000x120	13,84	1,84	ТК-1/1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-01	2000x800x120	5,71	0,91	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-02	2000x900x120	6,41	1,01	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-03	1950x800x120	5,57	0,89	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-04	1950x900x120	6,25	0,99	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-05	1900x800x120	5,43	0,87	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-06	1900x900x120	6,09	0,96	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-07	2000x1200x120	8,51	1,31	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-08	1950x1200x120	8,29	1,27	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-09	1900x1200x120	8,08	1,24	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-10	2000x1400x120	9,90	1,50	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-11	1950x1400x120	9,66	1,47	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-12	1900x1400x120	9,41	1,43	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-13	2000x1600x120	11,30	1,70	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-14	1950x1600x120	11,02	1,66	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-15	1900x1600x120	10,74	1,62	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-16	2000x1800x120	12,69	1,89	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-17	1950x1800x120	12,38	1,85	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-18	1900x1800x120	12,07	1,81	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-19	1200x650x120	2,61	0,45	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-20	1250x700x120	2,93	0,50	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-21	1400x700x120	3,53	0,59	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-22	1600x800x120	4,58	0,74	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-23	2000x2000x120	14,09	2,09	ПКТ

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для **МО(СДРЭ)** представлены в таблице № 9.1.

Таблица № 9.1.

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-06	4	14*4	1

ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-17	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-18	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-19	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-20	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-21	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-22	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-12-23	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-17	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-18	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-19	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-20	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-21	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-22	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-ВП-ТК-1/1-23	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-01	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-02	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-03	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-04	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-05	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-06	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-07	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-08	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-09	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-10	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-11	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-12	4	12*4	4

ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-13	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-14	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-15	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-16	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-17	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-18	4	12*4	4
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-19	2	12*4	5
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-20	2	12*4	5
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-21	2	12*4	5
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-22	2	12*4	5
ВиЦыАн-МПП-ВП-ПКТ-23	4	12*4	4

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МО (СРЭ) представлены таблице № 10

Таблица № 10. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МО (СРЭ).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца в кг	Масса чехла в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-01	2000x800x80	4,37	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-02	2000x900x80	4,91	0,52	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-03	1950x800x80	4,26	0,58	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-04	1950x900x80	4,79	0,51	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-05	1900x800x80	4,15	0,56	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-06	1900x900x80	4,67	0,77	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-07	2000x1200x80	6,53	0,75	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-08	1950x1200x80	6,37	0,73	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-09	1900x1200x80	6,2	0,89	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-10	2000x1400x80	7,61	0,87	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-11	1950x1400x80	7,42	0,85	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-12	1900x1400x80	7,23	1,01	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-13	2000x1600x80	8,69	0,98	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-14	1950x1600x80	8,47	0,96	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-15	1900x1600x80	8,25	1,13	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-16	2000x1800x80	9,77	1,10	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-17	1950x1800x80	9,52	1,07	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-18	1900x1800x80	9,28	0,26	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-19	1200x600x80	1,98	0,28	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-20	1250x650x80	2,23	0,34	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-21	1400x700x80	2,69	0,43	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-22	1600x800x80	3,5	1,24	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-23	2000x2000x80	10,8	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-01	2000x800x80	4,7	0,86	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-02	2000x900x80	5,28	0,96	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-03	1950x800x80	4,59	0,84	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-04	1950x900x80	5,15	0,94	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-05	1900x800x80	4,47	0,82	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-06	1900x900x80	5,02	0,91	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-07	2000x1200x80	7,01	1,25	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-08	1950x1200x80	6,83	1,22	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-09	1900x1200x80	6,66	1,19	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-10	2000x1400x80	8,16	1,44	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-11	1950x1400x80	7,96	1,41	ПКТ

ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-12	1900x1400x80	7,76	1,37	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-13	2000x1600x80	9,31	1,63	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-14	1950x1600x80	9,08	1,59	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-15	1900x1600x80	8,85	1,55	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-16	2000x1800x80	10,5	1,82	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-17	1950x1800x80	10,2	1,78	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-18	1900x1800x80	9,95	1,74	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-19	1200x600x80	2,14	0,41	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-20	1250x650x80	2,41	0,46	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-21	1400x700x80	2,9	0,55	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-22	1600x800x80	3,77	0,70	ПКТ
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-23	2000x2000x80	11,6	2,02	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-01	2000x800x100	5,35	0,55	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-02	2000x900x100	6,01	0,61	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-03	1950x800x100	5,21	0,53	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-04	1950x900x100	5,86	0,59	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-05	1900x800x100	5,08	0,52	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-06	1900x900x100	5,71	0,58	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-07	2000x1200x100	7,99	0,79	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-08	1950x1200x100	7,79	0,77	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-09	1900x1200x100	7,59	0,75	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-10	2000x1400x100	9,31	0,91	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-11	1950x1400x100	9,08	0,89	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-12	1900x1400x100	8,84	0,86	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-13	2000x1600x80	10,6	1,03	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-14	1950x1600x100	10,4	1,00	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-15	1900x1600x100	10,1	0,98	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-16	2000x1800x100	11,9	1,15	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-17	1950x1800x100	11,6	1,12	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-18	1900x1800x100	11,4	1,09	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-19	1200x600x100	2,43	0,27	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-20	1250x650x100	2,73	0,30	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-21	1400x700x100	3,29	0,35	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-22	1600x800x100	4,28	0,44	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-23	2000x2000x100	13,3	1,27	ТК-12
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-01	2000x800x100	5,69	0,89	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-02	2000x900x100	6,38	0,98	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-03	1950x800x100	5,55	0,87	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-04	1950x900x100	6,23	0,96	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-05	1900x800x100	5,41	0,85	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-06	1900x900x80	6,07	0,94	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-07	2000x1200x80	8,48	1,28	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-08	1950x1200x80	8,27	1,25	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-09	1900x1200x80	8,06	1,22	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-10	2000x1400x80	9,87	1,47	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-11	1950x1400x80	9,63	1,44	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-12	1900x1400x80	9,38	1,40	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-13	2000x1600x80	11,3	1,66	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-14	1950x1600x80	11	1,63	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-15	1900x1600x80	10,7	1,59	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-16	2000x1800x80	12,7	1,86	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-17	1950x1800x80	12,3	1,82	ПКТ

ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-18	1900x1800x80	12	1,77	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-19	1200x600x80	2,59	0,43	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-20	1250x650x80	5,69	0,48	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-21	1400x700x80	6,38	0,57	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-22	1600x800x80	5,55	0,72	ПКТ
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-23	2000x2000x80	6,23	2,05	ПКТ

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для **МО (СРЭ)** представлены в таблице № 10.1.

Таблице № 10.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-17	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-18	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-19	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-20	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-21	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-22	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ТК-12-23	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-17	4	14*4	1

ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-18	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-19	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-20	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-21	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-22	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП-КВ-ПКТ-23	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-17	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-18	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-19	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-20	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-21	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-22	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ТК-12-23	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-01	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-02	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-03	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-04	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-05	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-06	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-07	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-08	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-09	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-10	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-11	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-12	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-13	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-14	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-15	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-16	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-17	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-18	4	14*4	1
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-19	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-20	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-21	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-22	2	14*4	2
ВиЦыАн-МПП2-КВ-ПКТ-23	4	14*4	1

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМ (СЭП) представлены таблице № 11.

Таблица № 11. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОМ(СЭП).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ОМ-VE-01	2000x800x140	6,54	0,94	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-02	2000x900x140	7,34	1,04	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-03	1950x800x140	6,38	0,92	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-04	1950x900x140	7,16	1,01	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-05	1900x800x140	6,21	0,89	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-06	1900x900x140	6,97	0,99	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-07	2000x1200x140	9,73	1,33	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-08	1950x1200x140	9,49	1,30	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-09	1900x1200x140	9,25	1,27	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-10	2000x1400x140	11,33	1,53	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-11	1950x1400x140	11,05	1,50	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-12	1900x1400x140	10,77	1,46	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-13	2000x1600x140	12,93	1,73	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-14	1950x1600x140	12,61	1,69	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-15	1900x1600x140	12,29	1,65	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-16	2000x1800x140	14,53	1,93	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-17	1950x1800x140	14,17	1,88	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-18	1900x1800x140	13,81	1,84	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-19	1200x600x140	2,98	0,46	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-20	1250x650x140	3,36	0,51	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-21	1400x700x140	4,04	0,61	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-22	1600x800x140	5,24	0,76	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-VE-23	2000x2000x140	16,13	2,13	ПКТ

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для МОМ (СЭП) представлены в таблице № 11.1.

Таблице № 11.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ОМ-VE-01	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-02	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-03	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-04	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-05	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-06	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-07	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-08	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-09	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-10	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-11	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-12	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-13	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-VE-14	4	14*4	4

ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-15	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-16	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-17	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-18	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-19	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-20	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-21	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-22	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ВЕ-23	4	14*4	4

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МО (СМЭ) представлены таблице № 12.

Таблица № 12. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МО(СМЭ).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-01	2000x800x140	7,43	0,94	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-02	2000x900x140	8,35	1,04	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-03	1950x800x140	7,25	0,92	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-04	1950x900x140	8,14	1,01	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-05	1900x800x140	7,07	0,89	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-06	1900x900x140	7,93	0,99	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-07	2000x1200x140	11,08	1,33	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-08	1950x1200x140	10,80	1,30	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-09	1900x1200x140	10,53	1,27	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-10	2000x1400x140	12,90	1,53	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-11	1950x1400x140	12,58	1,50	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-12	1900x1400x140	12,26	1,46	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-13	2000x1600x140	14,72	1,73	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-14	1950x1600x140	14,36	1,69	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-15	1900x1600x140	13,99	1,65	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-16	2000x1800x140	16,54	1,93	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-17	1950x1800x140	16,13	1,88	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-18	1900x1800x140	15,72	1,84	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-19	1200x600x140	3,39	0,46	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-20	1250x650x140	3,81	0,51	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-21	1400x700x140	4,58	0,61	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-22	1600x800x140	5,96	0,76	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-23	2000x2000x140	18,37	2,13	ПКТ

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для МО (СМЭ) представлены в таблице № 12.1.

Таблице № 12.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-01	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-02	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-03	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-04	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-05	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-06	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-07	4	14*4	4

ВиЦыАн-ОМ-МЭ-08	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-09	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-10	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-11	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-12	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-13	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-14	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-15	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-16	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-17	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-18	4	14*4	4
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-19	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-20	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-21	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-22	2	14*4	5
ВиЦыАн-ОМ-МЭ-23	4	14*4	4

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОЖ (СКК) представлены таблице № 13.

Таблица № 13. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОЖ (СКК).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ОМ-К-01	2000x800x120	8,11	0,91	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-02	2000x900x120	9,11	1,01	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-03	1950x800x120	7,91	0,89	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-04	1950x900x120	8,88	0,99	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-05	1900x800x120	7,71	0,87	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-06	1900x900x120	8,66	0,96	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-07	2000x1200x120	12,11	1,31	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-08	1950x1200x120	11,80	1,27	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-09	1900x1200x120	11,50	1,24	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-10	2000x1400x120	14,10	1,50	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-11	1950x1400x120	13,75	1,47	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-12	1900x1400x120	13,40	1,43	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-13	2000x1600x120	16,10	1,70	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-14	1950x1600x120	15,70	1,66	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-15	1900x1600x120	15,30	1,62	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-16	2000x1800x120	18,09	1,89	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-17	1950x1800x120	17,64	1,85	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-18	1900x1800x120	17,20	1,81	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-19	1200x600x120	3,69	0,45	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-20	1250x650x120	4,15	0,50	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-21	1400x700x120	5,00	0,59	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-22	1600x800x120	6,50	0,74	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-К-23	2000x2000x120	20,09	2,09	ПКТ

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для МОЖ (СКК) представлены в таблице № 13.1.

Таблице № 13.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ОМ-К-01	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-02	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-03	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-04	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-05	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-06	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-07	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-08	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-09	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-10	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-11	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-12	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-13	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-14	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-15	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-16	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-17	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-18	4	12*4	4
ВиЦыАн-ОМ-К-19	2	12*4	5
ВиЦыАн-ОМ-К-20	2	12*4	5
ВиЦыАн-ОМ-К-21	2	12*4	5
ВиЦыАн-ОМ-К-22	2	12*4	5
ВиЦыАн-ОМ-К-23	4	12*4	4

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОЖ представлены таблице № 14.

Таблица № 14. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОЖ.

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ОМ-НР-01	2000x800x160	9,92	0,96	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-02	2000x900x160	11,14	1,06	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-03	1950x800x160	9,68	0,94	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-04	1950x900x160	10,87	1,04	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-05	1900x800x160	9,43	0,92	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-06	1900x900x160	10,59	1,01	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-07	2000x1200x160	14,80	1,36	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-08	1950x1200x160	14,44	1,33	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-09	1900x1200x160	14,07	1,30	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-10	2000x1400x160	17,24	1,56	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-11	1950x1400x160	16,82	1,53	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-12	1900x1400x160	16,39	1,49	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-13	2000x1600x160	19,68	1,76	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-14	1950x1600x160	19,19	1,72	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-15	1900x1600x160	18,71	1,68	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-16	2000x1800x160	22,12	1,96	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-17	1950x1800x160	21,57	1,92	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НР-18	1900x1800x160	21,03	1,87	ПКТ

ВиЦыАн-ОМ-НН-19	1200х600х160	4,51	0,48	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НН-20	1250х650х160	5,08	0,53	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НН-21	1400х700х160	6,11	0,62	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НН-22	1600х800х160	7,95	0,79	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-НН-23	2000х2000х160	24,56	2,16	ПКТ

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для **МОЖ** представлены в таблице № 14.1.

Таблице № 14.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ОМ-НН-01	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-02	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-03	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-04	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-05	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-06	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-07	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-08	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-09	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-10	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-11	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-12	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-13	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-14	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-15	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-16	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-17	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-18	4	16*4	4
ВиЦыАн-ОМ-НН-19	2	16*4	5
ВиЦыАн-ОМ-НН-20	2	16*4	5
ВиЦыАн-ОМ-НН-21	2	16*4	5
ВиЦыАн-ОМ-НН-22	2	16*4	5
ВиЦыАн-ОМ-НН-23	4	16*4	4

Сведения о номенклатуре (арткулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла **МОЖ** (Э) представлены таблице № 15.

Таблица № 15. Номенклатура (арткулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла **МОЖ (Э).**

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ОМ-СТ-01	2000х800х100	4,89	0,89	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-02	2000х900х100	5,48	0,98	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-03	1950х800х100	4,77	0,87	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-04	1950х900х100	5,35	0,96	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-05	1900х800х100	4,65	0,85	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-06	1900х900х100	5,21	0,94	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-07	2000х1200х100	7,28	1,28	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-08	1950х1200х100	7,10	1,25	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-09	1900х1200х100	6,92	1,22	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-10	2000х1400х100	8,47	1,47	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-СТ-11	1950х1400х100	8,26	1,44	ПКТ

ВиЦыАн-ОМ-ST-12	1900x1400x100	8,05	1,40	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-13	2000x1600x100	9,66	1,66	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-14	1950x1600x100	9,43	1,63	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-15	1900x1600x100	9,19	1,59	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-16	2000x1800x100	10,86	1,86	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-17	1950x1800x100	10,59	1,82	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-18	1900x1800x100	10,32	1,77	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-19	1200x600x100	2,23	0,43	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-20	1250x650x100	2,51	0,48	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-21	1400x700x100	3,02	0,57	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-22	1600x800x100	3,92	0,72	ПКТ
ВиЦыАн-ОМ-ST-23	2000x2000x100	12,05	2,05	ПКТ

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для **МОЖ** представлены в таблице № 15.1.

Таблице № 15.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ОМ-ST-01	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-02	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-03	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-04	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-05	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-06	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-07	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-08	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-09	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-10	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-11	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-12	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-13	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-14	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-15	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-16	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-17	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-18	4	10*4	3
ВиЦыАн-ОМ-ST-19	2	14*4	2
ВиЦыАн-ОМ-ST-20	2	14*4	2
ВиЦыАн-ОМ-ST-21	2	14*4	2
ВиЦыАн-ОМ-ST-22	2	14*4	2
ВиЦыАн-ОМ-ST-23	4	14*4	2

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла **МОЭ** представлены таблице № 16.

Таблица № 16. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОЭ.

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матрацев кг	Масса чехла в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-01	2000x800x200	10,74	1,14	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-02	2000x900x200	12,05	1,25	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-03	1950x800x200	10,47	1,11	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-04	1950x900x200	11,76	1,23	Жаккард

ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-05	1900x800x200	10,21	1,09	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-06	1900x900x200	11,46	1,20	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-07	2000x1200x200	16,00	1,60	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-08	1950x1200x200	15,60	1,56	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-09	1900x1200x200	15,21	1,53	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-10	2000x1400x200	18,63	1,83	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-11	1950x1400x200	18,16	1,78	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-12	1900x1400x200	17,70	1,74	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-13	2000x1600x200	21,25	2,05	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-14	1950x1600x200	20,73	2,01	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-15	1900x1600x200	20,20	1,96	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-16	2000x1800x200	23,88	2,28	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-17	1950x1800x200	23,29	2,23	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-18	1900x1800x200	22,70	2,18	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-19	1200x600x200	4,90	0,58	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-20	1250x650x200	5,51	0,64	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-21	1400x700x200	6,62	0,74	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-22	1600x800x200	8,61	0,93	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-23	2000x2000x200	26,51	2,51	Жаккард

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для **МОЭ** представлены в таблице № 16.1.

Таблице № 16.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-01	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-02	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-03	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-04	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-05	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-06	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-07	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-08	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-09	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-10	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-11	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-12	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-13	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-14	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-15	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-16	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-17	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-18	4	20*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-19	2	20*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-20	2	20*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-21	2	20*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-22	2	20*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭРГ-23	4	20*4	4

Сведения о номенклатуре (артикулы), габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла **МОЭ (СЗЛ)** представлены таблице № 17.

Таблица № 17. Номенклатура (артикулы) габаритные размеры, масса (матраца и чехла) и тип применяемого чехла МОЭ (СЗЛ).

Артикул	Габаритные размеры (ДхШхВ), в мм	Масса матраца, в кг	Масса чехла, в кг	Тип чехла
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-01	2000х800х230	15,54	15,54	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-02	2000х900х230	17,45	17,45	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-03	1950х800х230	15,15	15,15	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-04	1950х900х230	17,01	17,01	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-05	1900х800х230	14,76	14,76	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-06	1900х900х230	16,58	16,58	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-07	2000х1200х230	23,17	23,17	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-08	1950х1200х230	22,60	22,60	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-09	1900х1200х230	22,02	22,02	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-10	2000х1400х230	26,99	26,99	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-11	1950х1400х230	26,32	26,32	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-12	1900х1400х230	25,65	25,65	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-13	2000х1600х230	30,81	30,81	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-14	1950х1600х230	30,05	30,05	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-15	1900х1600х230	29,28	29,28	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-16	2000х1800х230	34,63	34,63	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-17	1950х1800х230	33,77	33,77	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-18	1900х1800х230	32,91	32,91	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-19	1200х600х230	7,06	7,06	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-20	1250х650х230	7,95	7,95	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-21	1400х700х230	9,57	9,57	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-22	1600х800х230	12,45	12,45	Жаккард
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-23	2000х2000х230	38,45	38,45	Жаккард

Сведения о количестве ручек, размере ручек и схема их размещения для МОЭ (СЗЛ) представлены в таблице № 17.1.

Таблице № 17.1

Артикул	Количество ручек, в шт	Размеры ручек (Д*Ш, в см)	Схема размещения ручек
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-01	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-02	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-03	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-04	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-05	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-06	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-07	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-08	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-09	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-10	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-11	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-12	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-13	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-14	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-15	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-16	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-17	4	23*4	4
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-18	4	23*4	4

ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-19	2	23*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-20	2	23*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-21	2	23*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-22	2	23*4	5
ВиЦыАн-ОМ-ЭЗЛ-23	4	23*4	4

Предельные отклонения от габаритных размеров (кроме высоты) не превышают ± 10 мм, предельное отклонение от габаритных размеров (высота) не превышают ± 15 мм.

Предельное отклонение от массы (матрац и/или чехол) не превышают $\pm 10\%$.

Максимальная распределенная нагрузка на матрац не более 250 кг.

Долговечность матрацев не менее 10000 циклов нагружения.

Чехлы для матрацев съёмные на молнии. В зависимости от исполнения матраца и применяемого чехла, расположение и количество молний представлено таблице №18.

Таблица №18. Расположение и количество молний на чехле.

Сокращенное наименование исполнения матраца	Тип чехла	Количество молний, расположение молнии
МОМ	ТК-1/1, ТК-4, ТК-7, ТК-12, ПК	Одна, Г-образная по донышку
МОМ(У)	ТК-1/1, ТК-4, ТК-7, ТК-12	Одна, Г-образная по донышку
МОМ(Д)	ТК-4, ТК-7, ТК-12	Одна, на донышке между секциями
МОМ(Т)	ТК-4	Две, на донышке между секциями
	ТК-7, ТК-12	Одна, на донышке между секциями
МОМ(Ч)	ТК-4	Две, на донышке между секциями
	ТК-7, ТК-12	Две, на донышке между секция-ми
МОМС1	ТК-4	Матрац состоит из двух частей по одной молнии (всего две) на каждой части, П-образная по короткой стороне
МОМС2	ТК-4	Одна, П-образная по короткой стороне или Г-образная
МОМС3	ТК-4	Одна, П-образная по короткой стороне или Г-образная
МО(СДРЭ)	ТК-1/1, ТК-12, ПКТ	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МО(СРЭ)	ТК-12, ПКТ	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МОМ(СЭП)	ПКТ	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МО(СМЭ)	ПКТ	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МОЖ(СКК)	ПКТ	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МОЖ	ПКТ	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МОЖ(Э)	ПКТ	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МОЭ	Жаккард	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)
МОЭ(СЗЛ)	Жаккард	Одна, П-образная по короткой стороне (между ручками)

Поверхностная плотность чехлов в г/м² представлена в таблице №19(А).
Таблица №19(А). Поверхностная плотность чехлов в г/м².

Тип чехла	ТК-1/1	ТК-4	ТК-7	ТК-12	Жаккард	ПК	ПКТ
Поверхностная плотность, в г/м ²	180-210	250-350	115-135	135-150	230-280	105-145	177-277

Чехлы для матрацев имеют прочность (разрывную нагрузку по ширине и длине) не менее, в Н, в зависимости от типа чехла согласно таблице №19 (Б)

Таблица №19(Б). Показатели прочности чехла.

Прочность	Тип чехла						
	ТК-1/1	ТК-4	ТК-7	ТК-12	Жаккард	ПК	ПКТ
По длине	133,2	200	83,3	100	372	73,2	151
По ширине	66	100	40	50	185	35	75,6

Чехлы для матрацев обладают водоупорностью не менее 300 мм вод. ст.

Схема размещения ручек на чехле.

Схема №1.

На чехле 4 ручки расположенные горизонтально, по 2 ручки располагаются с боковой длинной стороны на расстояние 43-45 мм от ближайшего вертикального края и на расстояние 1-3 см от ближайшего горизонтального края.



Схема №2.

На чехле 2 ручки расположенные горизонтально, по 1 ручке располагаются с боковой длинной стороны посередине матраца с возможным смещением от центра ± 5 см и на расстоянии ±3 см от ближайшего горизонтального края.



Схема №3.

На чехле 4 ручки расположенные вертикально, по 2 ручки располагаются с боковой длинной стороны на расстояние 43-45 см от ближайшего вертикального края, высота матраца и длина ручек совпадают (10 см).



Схема №4.

На чехле 4 ручки расположенные вертикально, по 2 ручки располагаются с боковой длинной стороны на расстояние 43-45 см от ближайшего вертикального края, высота матраца и длина ручек совпадают (12/14/16/20/23 см).




Схема №5.

На чехле 2 ручки расположенные вертикально, по 1 ручке располагаются с боковой длинной стороны на расстояние 43-45 см от ближайшего вертикального края, высота матраца и длина ручек совпадают.



Схема №6.

На чехле 4 ручки расположенные горизонтально, по 2 ручки располагаются с боковой длинной стороны на расстояние 10-13 см от ближайшего вертикального края и на расстоянии 1-3 см от ближайшего горизонтального края.

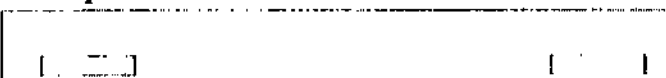

1.3. Состав изделия

В качестве основного наполнителя матрацев применяется ППУ (пенополиуретан). При изготовлении матрацев и чехлов используются следующие материалы и комплектующие, предназначенные для их изготовления:

1) для изготовления матрацев:

- пенополиуретан стандартный/профильный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м³;
- пенополиуретан стандартный/профильный марки ST 25/36, поверхностная плотность 25кг/м³;
- пенополиуретан вязкоэластичный марки VE 30/15, поверхностная плотность 30 кг/м³;
- пенополиуретан стандартный/профильный марки HR 35/35, поверхностная плотность 35 кг/м³;
- кокосовая койра, поверхностная плотность 100 кг/м³;
- латекс 7ми зонный марки BR, поверхностная плотность 100 кг/м³.

2) для изготовления чехлов:

- ТК-1/1 (состав: полиэстер65%, полиуритан 35%);
- ТК-12 (состав: полиэстер82%, полиуритан 18%);
- ТК-4 (состав: полиэфир 18%-20% поливинилхлорид 80%-82%);
- ТК-7 (состав: полиэстер 100%);
- Жаккард (состав: 40% хлопка и 60% полиэстер);
- ПК (состав: 50% хлопка и 50% полиэстера);
- ПКТ (состав: 50% хлопка и 50% полиэстера);

3) для склеивания матрацев с горизонтальными секциями (две, три и четыре):

- Клей для поролона водорастворимый SIMALFA 337RED.

- Застежка –молния спиральная, с бегунками из латуни марки ЛЦ30А3 производства - ООО

«Гамма» по ОСТ 1731.

Сведения об используемых материалах в соответствии с исполнении матраца представлены в таблице №20.

Таблица №20. Материалы в соответствии с исполнением матраца.

№	Наименование исполнения матраца	Наполнитель/чехол	Используемые материалы
1	Матрац ортопедический медицинский	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³
		Чехол	ТК-1/1 или ТК-4 или ТК-7 или ТК-12 или ПК
2	Матрац ортопедический медицинский (универсальный)	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 25/36, поверхностная плотность 25 кг/м ³ имеющий поперечный профиль
		Чехол	ТК-1/1 или ТК-4 или ТК-7 или ТК-12
3	Матрац ортопедический медицинский (двухсекционный)	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³
		Чехол	ТК-4 или ТК-7 или ТК-12
4	Матрац ортопедический медицинский (трехсекционный)	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³
		Чехол	ТК-4 или ТК-7 или ТК-12
5	Матрац ортопедический медицинский (четырёхсекционный)	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³
		Чехол	ТК-4 или ТК-7 или ТК-12
6	Матрац ортопедический медицинский "Спецпроф" №1	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³
		Чехол	ТК-4

7	Матрац ортопедический медицинский "Спецпроф" №2	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³
		Чехол	ТК-4
8	Матрац ортопедический медицинский "Спецпроф" №3	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³
		Чехол	ТК-4
9	Матрац ортопедический (с дифференцированным релаксирующим эффектом)	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 25/36, поверхностная плотность 25 кг/м ³ имеющий поперечный профиль
		Чехол	ТК-1/1 или ТК-12 или ПКТ
10	Матрац ортопедический (с релаксирующим эффектом)	Наполнитель	пенополиуретан вязкоэластичный марки VE 30/15, поверхностная плотность 30 кг/м ³ , с профилем квадратной формы
		Чехол	ТК-12 или ПКТ
11	Матрац ортопедический мягкий (с эффектом памяти)	Наполнитель	Матрац изготовлен из четырех слоев, чередующихся слоев: - пенополиуретан вязкоэластичный марки VE 30/15, поверхностная плотность 30 кг/м ³ ; - пенополиуретан профильный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³ .
		Чехол	ПКТ
12	Матрац ортопедический (с массажным эффектом)	Наполнитель	Матрац изготовлен из трех слоев: - пенополиуретан профильный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22кг/м ³ ; - пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³ ; - кокосовая койра, поверхностная плотность 100 кг/м ³ .
		Чехол	ПКТ
13	Матрац ортопедический жесткий (с кокосовой койрой)	Наполнитель	Матрац изготовлен из трех слоев, верхний и нижний слой из кокосовой койры: - кокосовая койра, поверхностная плотность 100 кг/м ³ ; - пенополиуретан стандартный марки ST 22/36, поверхностная плотность 22 кг/м ³ .
		Чехол	ПКТ
14	Матрац ортопедический жесткий	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки HR 35/35, поверхностная плотность 35 кг/м ³
		Чехол	ПКТ
15	Матрац ортопедический жесткий (эконом)	Наполнитель	пенополиуретан стандартный марки ST 25/36, поверхностная плотность 25 кг/м ³ .
		Чехол	ПКТ
16	Матрац ортопедический эргономичный	Наполнитель	Матрац изготовлен из двух слоев: - пенополиуретан профильный марки ST 25/36, поверхностная плотность 25кг/м ³ ; - пенополиуретан профильный марки HR 35/35, поверхностная плотность 35 кг/м ³ .
		Чехол	Жаккард

17	Матрац ортопедический эргономичный (с зональным латексом)	Наполнитель	Матрац изготовлен из трех слоев: - латекс 7ми зонный марки BR, поверхностная плотность 100 кг/м ³ ; - пенополиуретан профильный марки ST 25/36, поверхностная плотность 25 кг/м ³ ; - пенополиуретан профильный марки HR 35/35, поверхностная плотность 35 кг/м ³ .
		Чехол	Жаккард

В комплект поставки матрасов входит матрац с чехлом, упаковка и эксплуатационный документ, по примеру таблицы № 21.

Таблица № 21. Комплектность изделия.

	Наименование	Обозначение документа	Кол-во, в шт.
1	Матрац ортопедический медицинский, арт. ВиЦыАн-М1-ПК-01	ВИЦЫ.245290.006-0001	1
	Руководство по эксплуатации	ВИЦЫ.245290.006РЭ	1
	Упаковка	ВИЦЫ.269290.006УП	1

Все варианты матрасов, согласно конструкторской документации в таблицах №1-17.

1.4. Устройство и работа

Матрасы размещают на опорную платформу для матраса кровати, что создает удобную поверхности, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать. Матрасы способствуют равномерному распределению массы тела пациентов, а также тому, чтобы пациентам с заболеваниями спины занимали правильные для лечения позы.

Модели МОМ, МОМ(У), МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС2, МОМС3, МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОМ(СЭП), МО(СМЭ), МОЖ(СКК), МОЖ, МОЖ(Э), МОЭ, МОЭ(СЗЛ) – одноблочные.

Модель МОМС1 – двухблочный.

Двухблочность означает, что каждый блок матраса находится в отдельном чехле.

Внутренняя форма одного блока для моделей:

- МОМ, МОМ(У), МОМС1, МОМС2, МОМС3, МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОЖ и МОЖ(Э) – цельная.
- МОМ(Д) из двух вертикальных секций;
- МОМ(Т) из трех вертикальных секций;
- МОМ(Ч) из четырех вертикальных секций;
- МОЭ из двух горизонтальных секций;
- МО(СМЭ), МОЖ(СКК) и МОЭ(СЗЛ) из трех горизонтальных секций;
- МОМ(СЭП) из четырех горизонтальных секций.

Матрасы с внутренней формой блока из двух, трех и четырех горизонтальных секций соединяются между собой с помощью клея.

Модели МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОМ(СЭП), МО(СМЭ), МОЭ и МОЭ(СЗЛ) имеют одну мягкую сторону. На сам матрац с односторонней рабочей (мягкой) стороной наклеена этикетка "вверх" с этой стороны, для определения мягкой стороны.

Модели МОМ, МОМ(У), МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОМС2, МОМС3, МОЖ(СКК), МОЖ и МОЖ(Э) имеют две мягкие стороны.

Модели МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОЭ и МОЭ(СЗЛ) располагают одним рабочим краем (мягким) для расположения головы. На матрац с одним рабочим краем рабочей (мягкой) стороны наклеивают этикетку "голова" на этот край стороны.

Модели МОМ, МОМ(У), МОМС2, МОМС3, МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОМ(СЭП), МО(СМЭ), МОЖ(СКК), МОЖ, МОЖ(Э) – с двумя рабочими краями (не принципиально расположение головы).

Модели МОМ, МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОМС2, МОМС3, МОМ(СЭП), МОЖ(СКК), МОЖ и МОЖ(Э) имеют плоскую форму наполнения рабочей (мягкой) стороны.

Модели МОМ(У), МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОЭ имеют трапециевидную форму наполнения рабочей (мягкой) стороны.

Модель МО(СМЭ) имеет волнистую формы наполнения рабочей (мягкой) стороны.

Модель (МОЭ(СЗЛ) имеет смешанную (волнистые и трапециевидные) форму наполнения рабочей стороны.

Все модели матрасов имеют чехлы. Чехлы для матрасов съёмные на молнии, что позволяет неоднократно собирать (матрац вставлен в чехол) и разбирать (чехол с матраца снят), без дополнительных усилий и затруднений пользователя.

Застежка-молния на чехле легко застегивается, не оставляя открытых отверстий, замок надежно фиксируется при прижатии ручки замка к корпусу замка, не допуская расхождения звеньев.

Чехлы для матрасов устойчивы к воздействию биологических жидкостей (моча), с которыми они контактируют в процессе эксплуатации. Чехлы обладают водоупорностью не менее 300 мм вод. ст.

Матрацы поставляются в чехлах.

1.5. Маркировка

1.5.1. Маркировка матрасов содержит следующую информацию:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- исполнение матраца;
- артикул;
- габаритные размеры матрацы;
- тип применяемого чехла;
- номер партии (серии);
- сведения о регистрационном удостоверении;
- дата изготовления;
- обозначение настоящих технических условий.

Также допускается указывать в маркировке другие дополнительные сведения (например, массу нетто).

1.5.2. Маркировка выполняется на самом изделии, пришивается к кромке матраца.

1.5.3. Маркировка матрасов с одной рабочей стороной имеет пришитое обозначение "вверх" или эквивалент или рисунок, понятно отражающий данное обстоятельство.

1.5.4. Маркировка матрасов с одним рабочим краем имеет пришитое обозначение "голова" или эквивалент или рисунок, понятно отражающий данное обстоятельство.

1.5.5. Транспортная маркировка грузовых мест выполнена в соответствии с ГОСТ 14192 раздел 1. На транспортную тару нанесена маркировка:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- исполнение матраца;
- артикул;
- габаритные размеры матрацы;
- тип применяемого чехла;
- номер партии (серии);
- дата изготовления;
- сведения о регистрационном удостоверении;
- штрих – код;
- обозначение настоящих технических условий.

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

На транспортную упаковку, в зависимости от изделий, должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Беречь от влаги», «Пределы температуры».

1.6. Упаковка

1.6.1. Упаковка матрасов соответствует ГОСТ 19917 и обеспечивает их сохранность при транспортировании и хранении.

1.6.2. Матрацы упакованы в рукав из полиэтилена и запаяны.

II. Показания к применению

Матрацы помещаются на опорную платформу на матрацы кровати для создания удобной поверхности, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать. Матрацы способствуют равномерному распределению массы тела пациентов, а также тому, чтобы пациентам с заболеваниями спины занимали правильные для лечения позы.

Показания к применению для каждой модели матрацев представлены в Таблице № 22.

Таблица № 22.

Наименование матраца	Показания к применению
МОМ, МОМ(У), МОМ(Д), МОМ(Т),МОМ(Ч), МО(СДРЭ), МОСМЭ), МОЖ(Э), МОЭ, МОЭ(СЗЛ)	Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время сна или дневного отдыха. Профилактика возникновения болей в спине. Профилактика развития нарушений осанки. Нарушение кровоснабжения мышц и связочного аппарата позвоночника. Комплексная реабилитация после травм позвоночника (на поздних этапах восстановления).
МО(СРЭ), МОМ(СЭП)	Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время сна или дневного отдыха. Профилактика возникновения болей в спине. Комплексная терапия при болях в пояснице. Профилактика развития нарушений осанки. Нарушение кровоснабжения мышц и связочного аппарата позвоночника. Комплексная реабилитация после травм позвоночника (на поздних этапах восстановления). Рекомендуется для людей от 55 лет
МОЖ (СКК), МОЖ	Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время сна или дневного отдыха. Профилактика возникновения болей в спине. Комплексная терапия заболеваний шейного отдела позвоночника Профилактика развития нарушений осанки. Нарушение кровоснабжения мышц и связочного аппарата позвоночника. Комплексная реабилитация после травм позвоночника (на поздних этапах восстановления). Рекомендуется для детей от 0 до 11 лет и подростков от 12 лет и молодых людей до 25 лет.
МОМС1	Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время сна или дневного отдыха. Нарушение кровоснабжения мышц и связочного аппарата позвоночника. Обеспечение максимального комфорта в положении лежа.
МОМС2, МОМС3	Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины. Нарушение кровоснабжения мышц и связочного аппарата позвоночника. Обеспечение максимального комфорта в положении лёжа.

III. Противопоказания к применению

Матрацы не имеют медицинских противопоказаний к применению, побочные действия не выявлены.

IV. Использование по назначению.

4.1. Эксплуатационные ограничения

- не кладите матрац на сломанное или не предназначенное для этого основание;
- не кладите матрац на неровное основание, на основания разного уровня, на решетчатое основание, если зазор между рейками превышает 5 см. Это может сказаться на форме матраца и сократить срок его службы;
- не кладите матрац на основание неподходящего размера.
- не класть матрацы на мягкие основания, матрацы используются только на жестком основании;
- не используйте матрац для глаженья – это может привести к необратимым повреждениям покрытия матраца;
- изделие нельзя подвергать резким механическим воздействиям (прыгать, ходить по матрацу, ронять).
- не превышать распределительную нагрузку, не более 250 кг.
- аллергические реакции на используемые материалы;
- при выраженной нестабильности позвонков, в раннем периоде реабилитации после травм позвоночника, при наличии множественных межпозвонковых грыж перед применением матраца необходимо проконсультироваться с врачом.
- острые воспалительные заболевания кожи пациента в области применения;
- беречь от соприкосновения с острыми и режущими предметами.

4.2. Подготовка изделия к использованию

- перед первым использованием снять с матраца полиэтиленовую упаковку и уложить на кровать;
- матрац в кровати должен располагаться свободно (внутренние размеры кровати не должны быть меньше размеров матраца);
- при использовании матраца на решетчатом основании, где зазор между решетками больше 5 см, следует использовать подматрасник, предотвращающий деформацию изделия.
- эксплуатировать изделие согласно УХЛ 4.2 от +10⁰С до +35⁰С и относительной влажностью 80% (при +25⁰С).
- извлечь матрац из упаковки;
- визуально проверить чехол матраца на наличие производственного дефекта;
- разместить на опорную платформу матрац кровати соответствующего размера, на платформу матрац размещается рабочей (мягкой поверхностью) вверх, если матрац с двумя рабочими поверхностями, то на выбор.

4.3. Использование изделия

Использовать матрац, согласно его показанию к применению, см. таблицу № 22. После эксплуатации матраца, чехол дезинфицируется. При необходимости чехол с матраца можно снять.

Чехлы для матрацев должны быть закреплены с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов. Морщины на чехлах исчезают после легко разглаживания рукой. Чехол закрепляется на матраце с помощью застежки молнии.

Модели МО(СДРЭ), МО(СРЭ), МОМ(СЭП), МО(СМЭ), МОЭ и МОЭ(СЗЛ), имеющие одну мягкую сторону (рабочую), соответственно пациента укладывают на мягкую рабочую поверхность.

На модели МОМ, МОМ(У), МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОМС2, МОМС3, МОЖ(СКК), МОЖ и МОЖ(Э), имеющие две мягких стороны, пациента можно укладывать на одну из сторон по необходимости стороны матраца можно менять, что продлит срок эксплуатации матраца.

Модели МОМ(Д), МОМ(Т), МОМ(Ч), МОМС1, МОЭ и МОЭ(СЗЛ) располагают одним рабочим краем (мягким) для расположения головы, соответственно пациент укладывается головой на рабочий край.

Модели МОМ, МОМ(У), МОМС2, МОМС3, МО(СДРЭ),МО(СРЭ), МОМ(СЭП), МО(СМЭ), МОЖ(СКК), МОЖ, МОЖ(Э) – с двумя рабочими краями (не принципиально расположение головы), поэтому пациента можно укладывать головой на любой рабочий край.

V. Техническое обслуживание

Матрацы требуют своевременной (в зависимости от загрязнения) дезинфекции и сушки.

Наружные поверхности матрацев дезинфицируется по МУ-287-113 раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644.

Чехлы для матрацев после эксплуатации подвергаются дезинфекции согласно МУ-287-113 в зависимости от типа чехла согласно таблице №23

Таблица №23. Дезинфекция чехлов

Тип чехла	ТК-1/1	ТК-7	ТК-12	ТК-4	Жаккард	ПК	ПКТ
Метод дезинфекции	1)Физический: паровой			Химический			
	2)Химический						
Дезинфицирующий агент или дезинфицирующее средство	1)Водяной насыщенный пар под избыточным давлением Р = 0,05 МПа (0,5 кгс/см2)			Аламинол (Россия)			
	2)Аламинол (Россия)						
Режим дезинфекции	1)Номинальное значение температуры (110±2) °С Время выдержки 20+5 мин			Концентрация раствора 3%, время выдержки 90 мин			
	2)Концентрация раствора 3%, время выдержки 90 мин						

VI. Хранение

6.1. Условия хранения

Матрацы хранятся в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 85 %.

6.2. Гарантийные сроки хранения

Средний срок службы должен быть не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации матрацев – 12 месяца со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

VII. Транспортирование

7.1.Матрацы допускается перевозить транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и контейнерах, в соответствии с правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 85 %.

7.2. Не допускается выгружать матрацы сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

VIII.Утилизация

Утилизация и уничтожение использованных изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», как отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы), в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских отходов соответствующего класса опасности и нормами экологического законодательства.

IX. Контактные данные

Производитель: ООО «Компания ВиЦыАн»

Юридический адрес:

450018, Россия, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Флотская, д. 34А, помещ. 1

Место производства: 450018, Россия, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Флотская, д. 34А, помещ. 3,4,5.

Тел: 8(347)29-59-103,8(800)5555-201

E-mail: office@vitsyan.ru

Прошито и пронумеровано
40 (сорок) листов
Директор ООО "Компания ВиЦыАн"
Цыганков В.Ю.

