



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Профит Медика»

П.В. Смачков

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в вариантах исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 2,5х34,5 см; 2,5х50 см; 2,5х100 см; 8,0х50 см; 8,0х70 см; 8,0х80 см; 8,0х100 см; 8,0х150 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.



Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 2,5х34,5 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 x 34,5 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

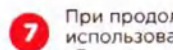

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

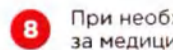

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121



Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 x 34,5 см



2-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**


РЗН № _____ ОТ _____
по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»
123154, Россия, г. Москва,
Бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE | R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

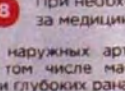
- 1  Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.
- 2  Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом.
- 3  Подвести один конец бинта к источнику кровотечения.
- 4  Плотно уложить бинт в рану послойно.
- 5  Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.
- 6  Наложить давящую повязку поверх бинта.
- 7  При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».
- 8  При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 213684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.


Адрес места производства:
АО НПФ «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Натоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

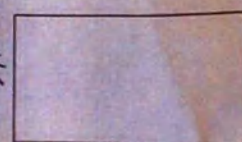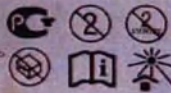

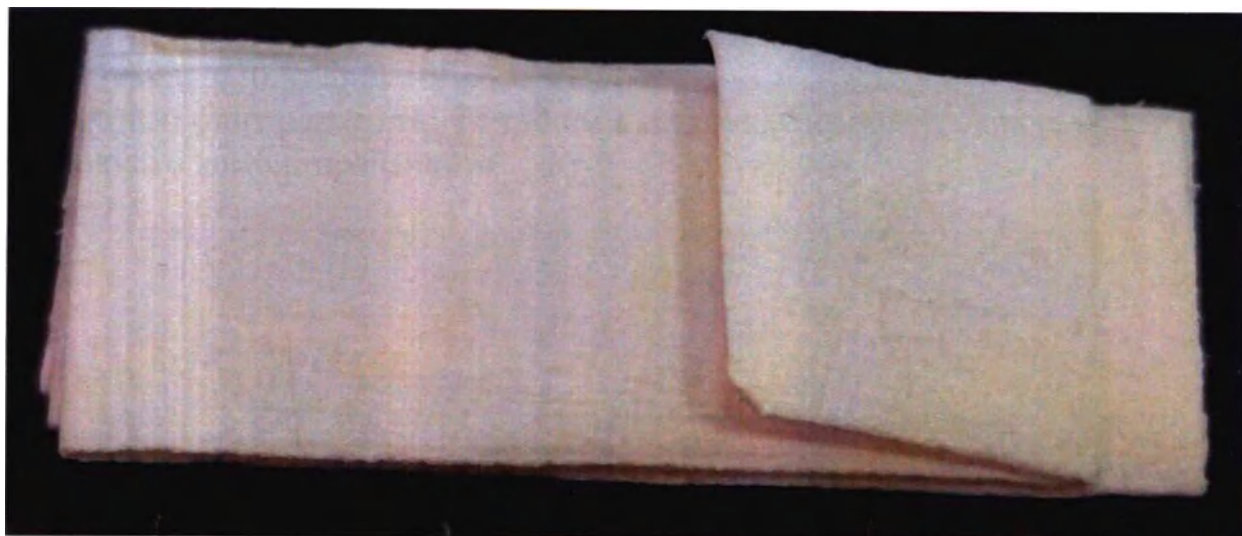

Бинт: полотно нетканое марки WYPALL® X70, WYPALL® X80, производства Кимберли-Кларк, США

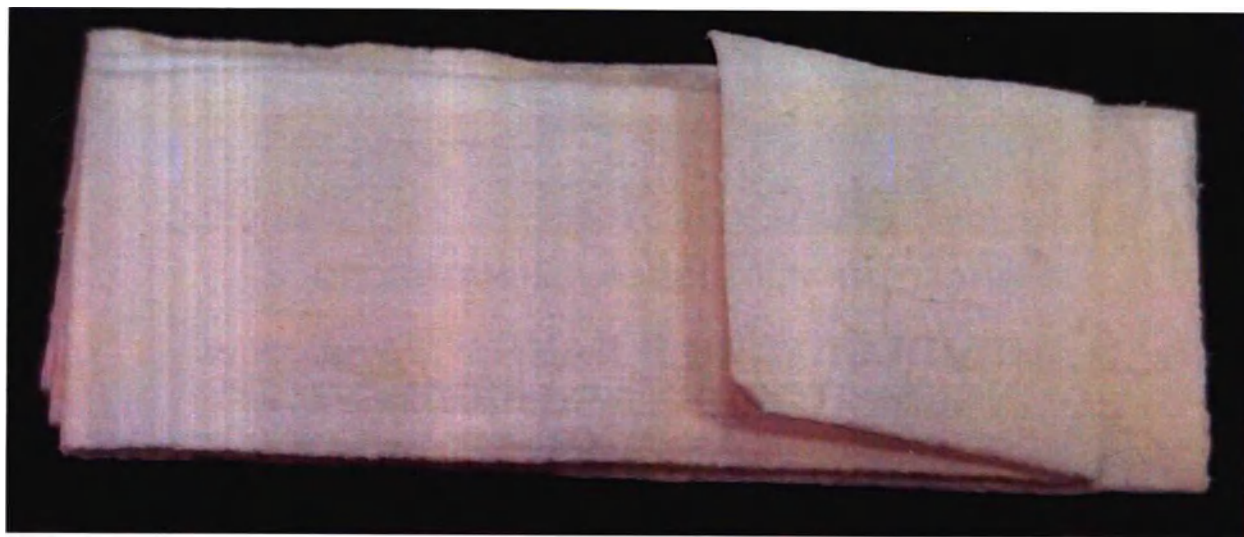

Бинт: полотно нетканое термоскрепленное марки VIZORB® 3062 (MBALL 70) производ-ства «Глатфельтер Штейнфурт ГмБх», Германия

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 2,5x50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

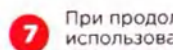

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

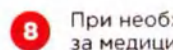

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Исползованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121



Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 x 50 см



2-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE | R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 x 50 см



2-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медикал»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3,
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом.



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения.




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно.




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта.

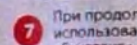

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемостекс».

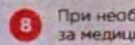



8 При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 213684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:


АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. В, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

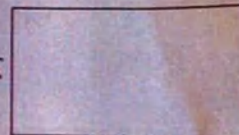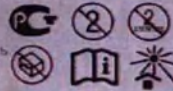



Бинт: полотно нетканое марки WYPALL® X70, WYPALL® X80, производства Кимберли-Кларк, США

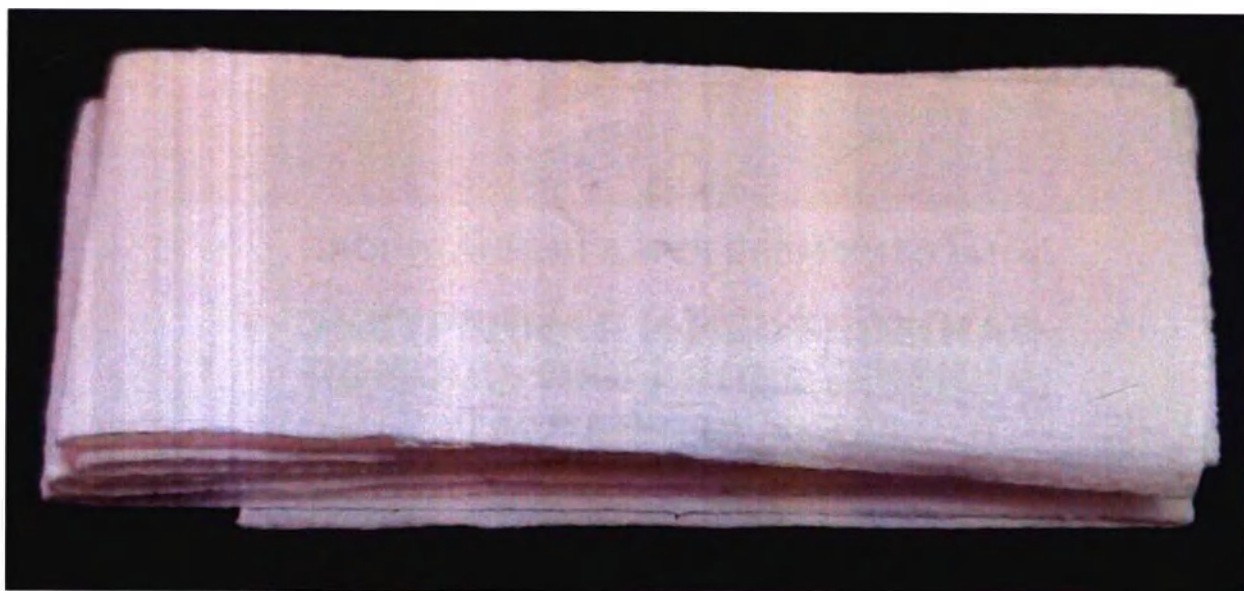



Бинт: полотно нетканое термоскрепленное марки VIZORB® 3062 (MBALL 70) производ-ства «Глатфельтер Штейнфурт ГмБх», Германия

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 2,5x100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

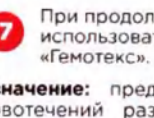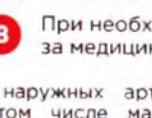- 1  Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.
- 2  Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом
- 3  Подвести один конец бинта к источнику кровотечения
- 4  Плотнo уложить бинт в рану послойно
- 5  Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.
- 6  Наложить давящую повязку поверх бинта
- 7  При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».
- 8  При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 x 100 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала ультравоснового
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом.




3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения.




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно.




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.

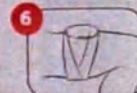

6 Наложить давящую повязку поверх бинта.

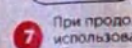

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемостек».

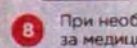



8 При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 213684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОК»
140080, Россия, Московская область,
г. Дзержинский, пос. Туряево,
стр. В, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

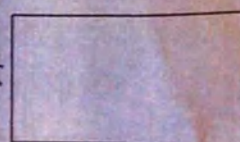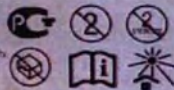

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 8,0х50 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом




3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.

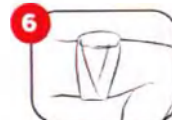

6 Наложить давящую повязку поверх бинта

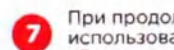

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

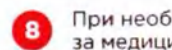

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 50 см



2-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
конфигурирования

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЭН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар Генерала Кабанова, дом 8, строение 3,
Телефон: +7 (495) 363-09-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE | R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения



4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта



7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс»

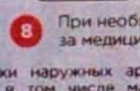



8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 21.3684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 21.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКС»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. В, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

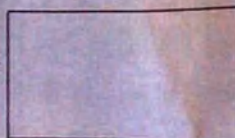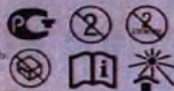

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 8,0x70 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8.0 x 70 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

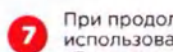

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

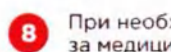

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 70 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом.



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения.




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно.




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта.

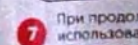

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемостекс».

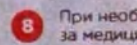



8 При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 213684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

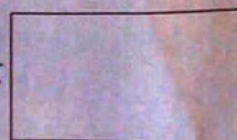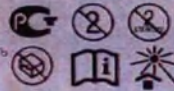

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 8,0х80 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8.0 x 80 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

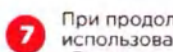

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

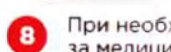

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.

Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 80 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ

в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

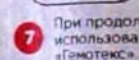

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс»

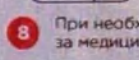


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью


Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПин 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПин 2.1.3.684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПТ «ИНТЕРОКС»
140080, Россия, Московская область
Плещинское, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 127

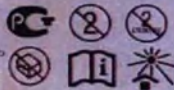

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

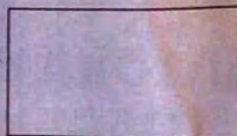

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 8,0x100 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 100 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом




3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.

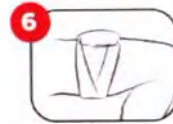

6 Наложить давящую повязку поверх бинта

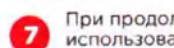

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

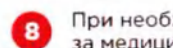


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

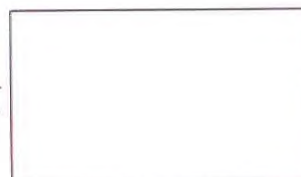

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 100 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



Одним движением
удалить из раны
кровь и инородные
предметы любым
пригодным
материалом




Подвести один конец
бинта к источнику
кровотечения



Плотно уложить бинт
в рану послойно




Сильно давить двумя
руками на область
раны в течение
3 минут.

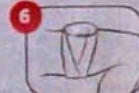

Наложить давящую повязку поверх бинта



При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

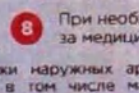


При необходимости обратиться
за медицинской помощью


Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** изотан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разорачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Исполнованное средство гемостатическое или средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область
с. Лыткарино, поселок Тураево
стр. А. 3а 121

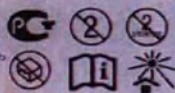

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

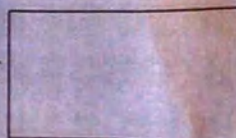

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в варианте исполнения:
Z-сложенный бинт размером: 8,0x150 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8.0 x 150 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

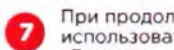

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

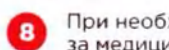

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121



Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



Одним движением
удалить из раны
кровь и инородные
предметы любым
пригодным
материалом



Подвести один конец
бинта к источнику
кровотечения




Плотно уложить бинт
в рану послойно




Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



Наложить давящую повязку поверх бинта

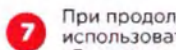

При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

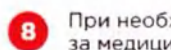

При необходимости обратиться
за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлениях аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковок, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121



Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 150 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ

в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

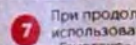

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

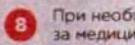


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Назначение: предназначено для остановки наружных артериальных и венозных кровотечений различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Состав:** хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Меры предосторожности:** предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. Перед наложением средство гемостатическое не допускается растягивать, разворачивать. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от -50 до +40 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПин 213684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПин 213684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКС»
140080, Россия, Московская область,
г. Дятлово, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Стерильно. Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата изготовления
указаны на шве упаковки.

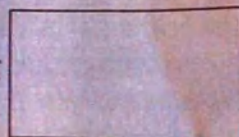

Маркировка транспортной (групповой) упаковки
 Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020 в вариантах исполнения:
 Z-сложенный бинт размером: 2,5х34,5 см; 2,5х50 см; 2,5х100 см; 8,0х50 см; 8,0х70 см; 8,0х80 см; 8,0х100 см; 8,0х150 см в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.

Наименование изделия	Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020		
Вариант исполнения	Z-сложенный бинт размером: _____ в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.		
Номер партии			
Производитель	АО «ПРОФИТ МЕДИКА» 123154, Россия, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 8, строение 3, этаж 6, пом. I, ком. 17		
Место производства	АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, стр. 8, здание 121		
Количество изделий	Шт.		
Дата изготовления			
Срок годности	3 года с даты стерилизации		
Условия хранения	Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от - 50°C до + 40 °C		
Утилизация	Средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.		
Вес брутто, кг			
Номер и дата регистрационного удостоверения	РУ № от г.		
Выпуск по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020			
«Нетоксично»	Штрих-код		

Упаковочный лист

Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020	
Вариант исполнения: Z-сложенный бинт размером:	
см	в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.
Производитель АО «ПРОФИТ МЕДИКА» 123154, Россия, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 8, строение 3, этаж 6, пом. I, ком. 17	
Место производства АО «НПП «ИНТЕРОКО» 140080, Россия, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, стр. 8, зд.121	
число изделий в упаковке, шт	
условный номер упаковщика и контролера	
дата упаковывания	















УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Профит Медика»

Э.А. Труфанов



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:

«Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ

21.20.24-002-66909893-2020 в вариантах исполнения:

Z-сложенный бинт размером: 2,5х5 см; 2,5х34,5 см; 2,5х50 см; 2,5х100 см;
8,0х50 см; 8,0х70 см; 8,0х80 см; 8,0х100 см; 8,0х150 см в индивидуальной
упаковке из материала упаковочного комбинированного»,

**а также упаковки медицинского изделия, в которой планируется
поставлять его потребителю и маркировки медицинского изделия**



Z-сложенный бинт размером: 2,5x5 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2.5 x 5 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3,
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом




3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.

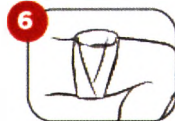

6 Наложить давящую повязку поверх бинта

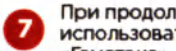

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

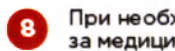

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.




штрих-код

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 × 5 см

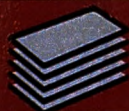

2-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала узаконенного
комбинированного.

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

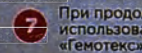

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

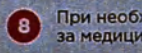

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью


Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



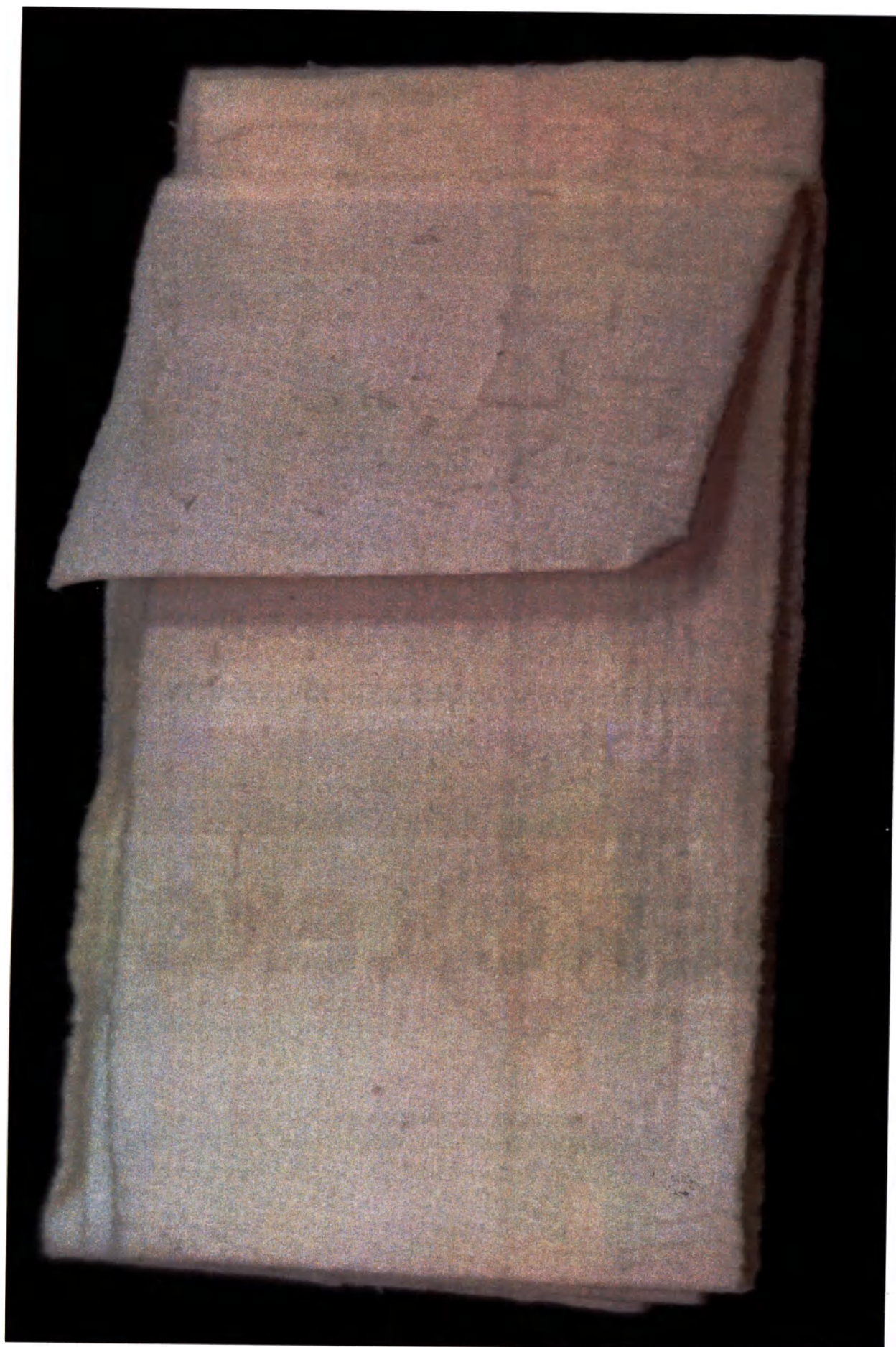

Z-сложенный бинт размером: 2,5х34,5 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2.5 x 34.5 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

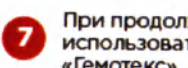

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

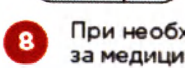

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.

Номер партии, срок годности, дата изготовления указаны на шве упаковки.




штрих-код

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

ПАКЕТ
2,5 × 34,5 см

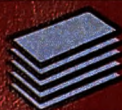

2-СЛОЖЕННЫЙ БИИТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

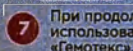

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

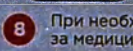


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.

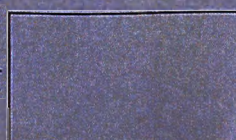



Z-сложенный бинт размером: 2,5x50 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2.5 x 50 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

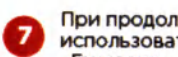

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

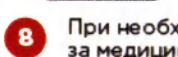

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



штрих-код

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 x 50 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

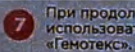

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

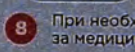

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью


Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °C (Упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °C (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °C. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОК»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



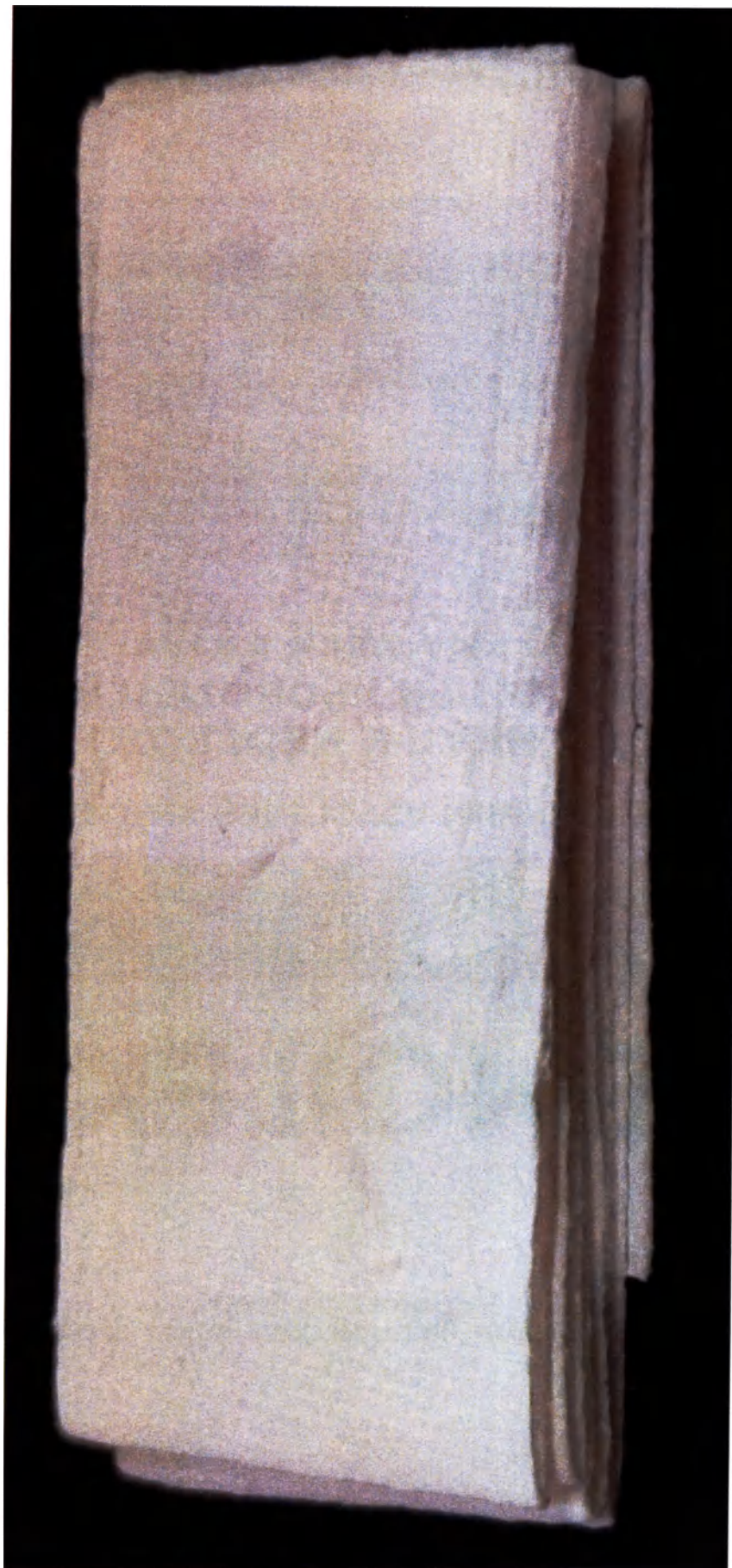

Z-сложенный бинт размером: 2,5x100 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2.5 x 100 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

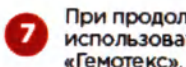

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

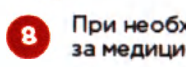

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.

Номер партии, срок годности, дата изготовления указаны на шве упаковки.




штрих-код

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
2,5 x 100 см

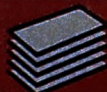

Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медикал»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3,
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmed.kz.ru

STERILE | R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

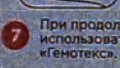

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов

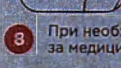


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых поврежденных мягких тканях, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3.684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



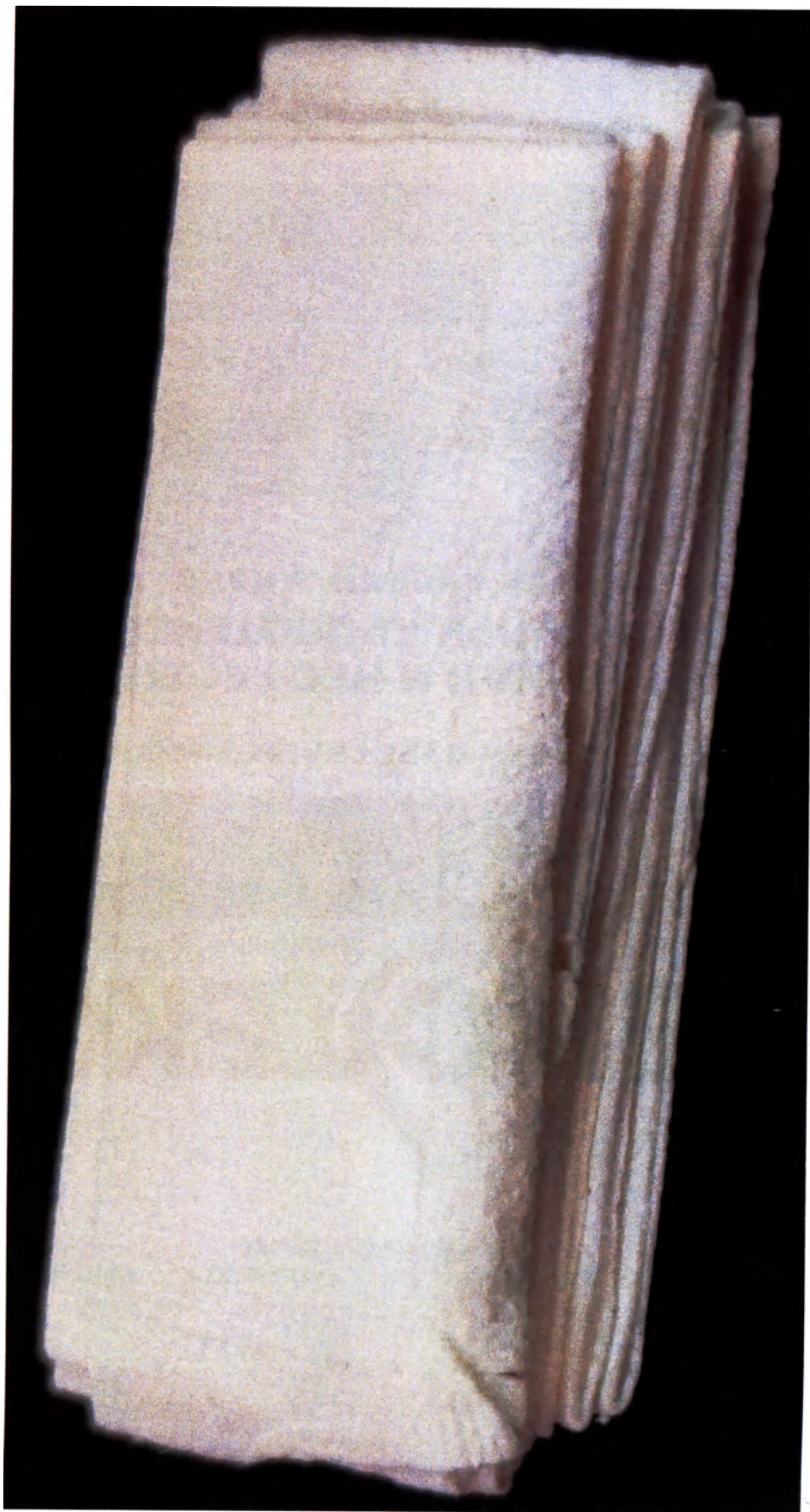

Z-сложенный бинт размером: 8,0x50 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 50 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

STERILE R

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 50 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ

в индивидуальной упаковке
из материала ультравысокого
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

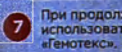

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

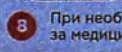

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью


Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 21.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 21.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Туряево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



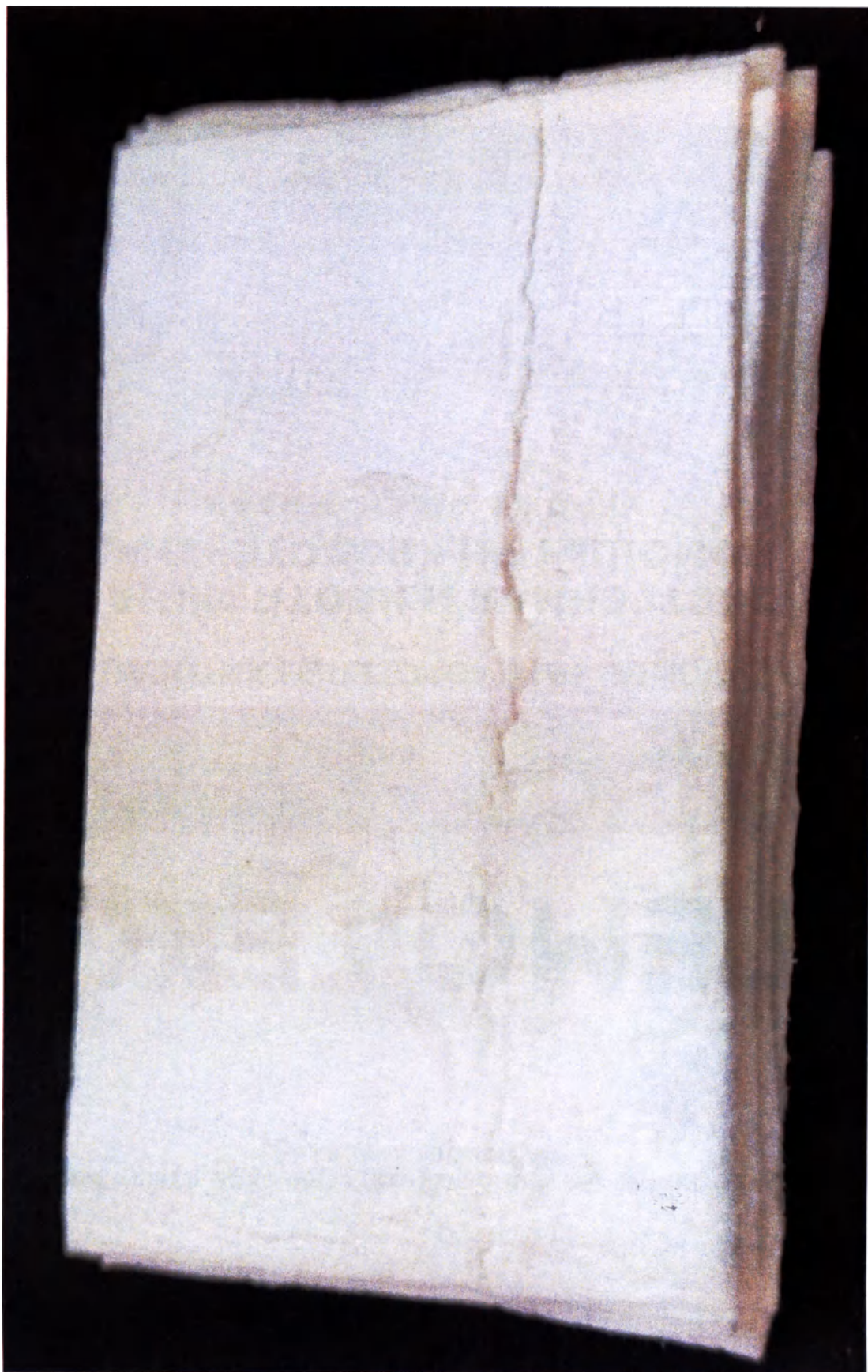

Z-сложенный бинт размером: 8,0x70 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8.0 x 70 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495)363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

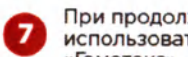

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

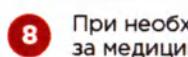

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.

Номер партии, срок годности, дата изготовления указаны на шве упаковки.



штрих-код

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 7,0 см



2-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

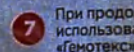

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

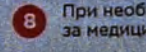


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью


Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3.684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3.684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.

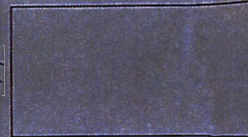

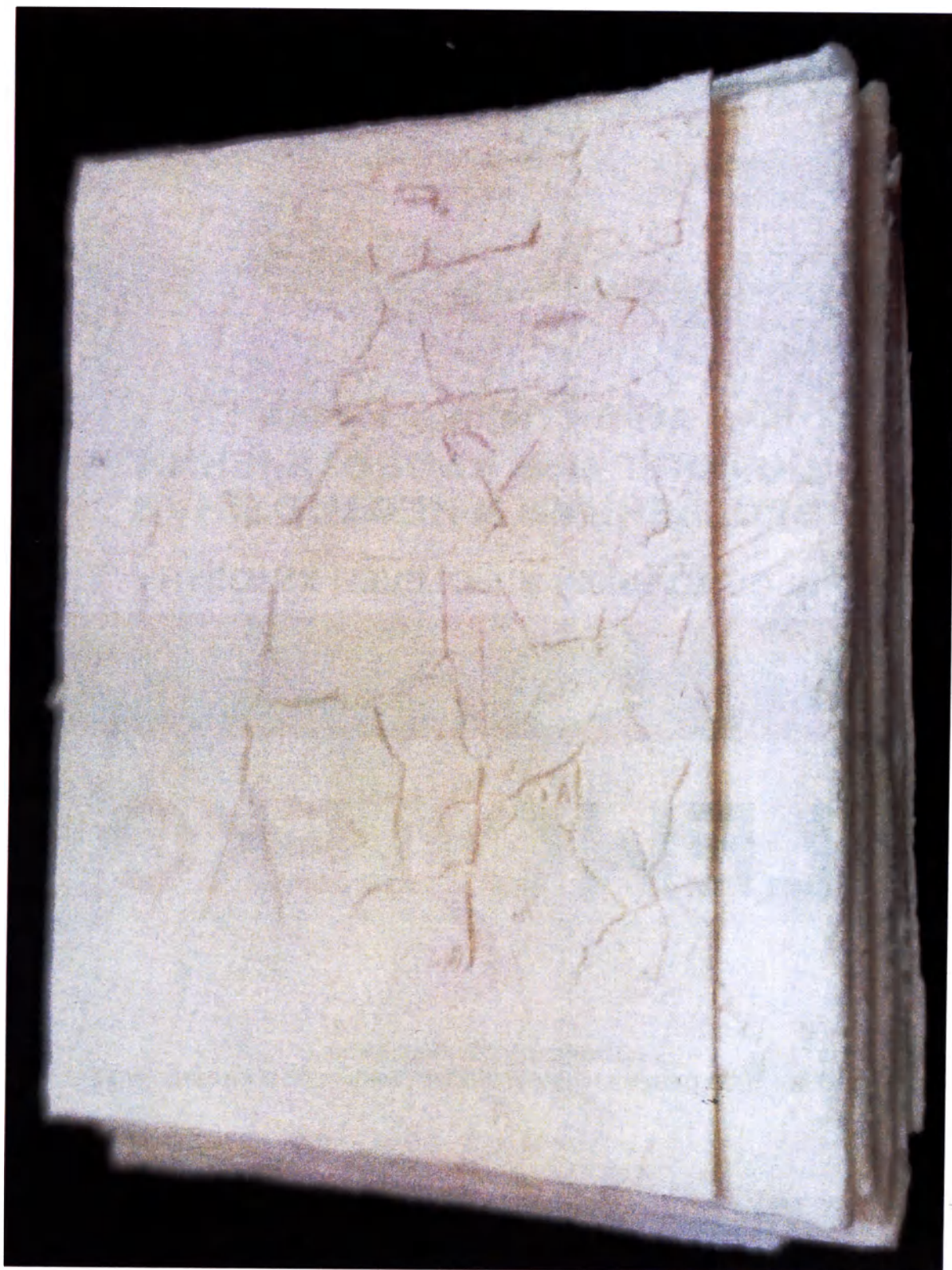

Z-сложенный бинт размером: 8,0x80 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8.0 x 80 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495)363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

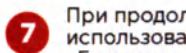

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

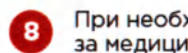

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.

Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.




штрих-код

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
80 x 80 см

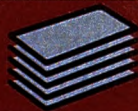

Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

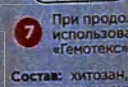

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

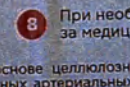


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (Упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 213684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 213684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140090, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



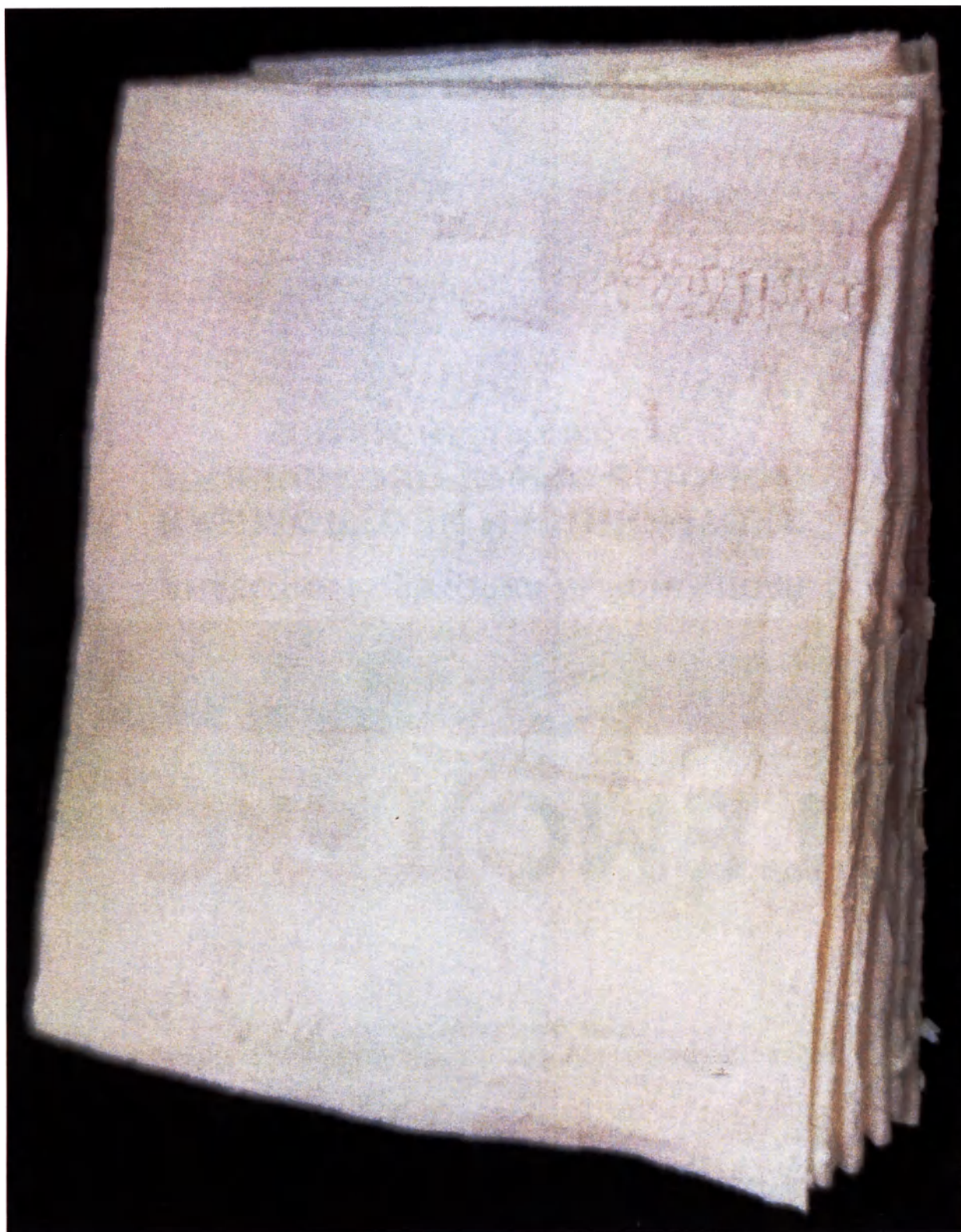

Z-сложенный бинт размером: 8,0x100 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8.0 x 100 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R


АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 100 см

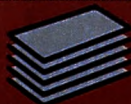

Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

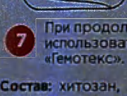

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

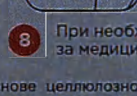

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью


Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (Упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. В, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



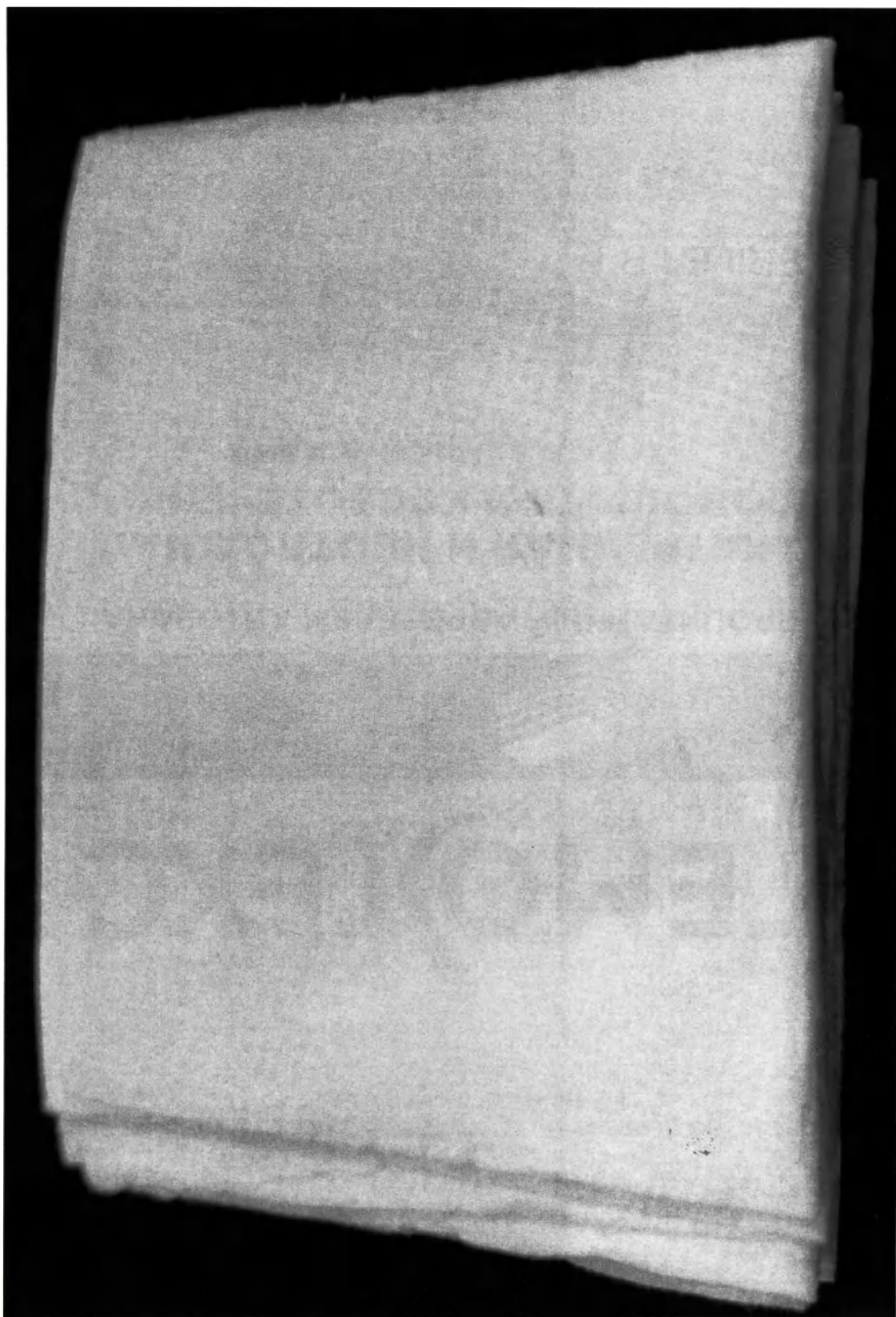

Z-сложенный бинт размером: 8,0x150 см

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8.0 x 150 см



Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ

в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотнo уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

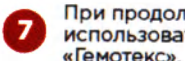

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемотекс».

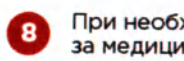

8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °С (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °С.

Утилизация: средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. И использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:

АО «НПП «ИНТЕРОКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.

Номер партии, срок годности, дата изготовления указаны на шве упаковки.




штрих-код

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

ГЕМОТЕКС

РАЗМЕР
8,0 x 150 см

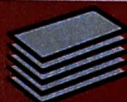

Z-СЛОЖЕННЫЙ БИНТ
в индивидуальной упаковке
из материала упаковочного
комбинированного

ПРОПИТАННЫЙ АЭРОГЕЛЕМ ХИТОЗАНА

**ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ,
УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ**

РЗН № _____ ОТ _____
ПО ТУ 21.20.24-002-66909893-2020

STERILE R

АО «Профит Медика»,
123154, Россия, г. Москва,
бульвар генерала Карбышева, дом 8, строение 3;
Телефон: +7 (495) 363-69-38
E-mail: medreg@profitmedika.ru

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Вскрыть упаковку по линии отрыва и извлечь бинт.



2 Одним движением удалить из раны кровь и инородные предметы любым пригодным материалом



3 Подвести один конец бинта к источнику кровотечения




4 Плотно уложить бинт в рану послойно




5 Сильно давить двумя руками на область раны в течение 3 минут.



6 Наложить давящую повязку поверх бинта

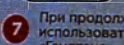

7 При продолжающемся кровотечении использовать несколько бинтов «Гемостекс».

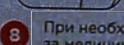


8 При необходимости обратиться за медицинской помощью

Состав: хитозан, нетканый материал на основе целлюлозного волокна. **Показания к применению:** оказание помощи при наружных артериальных и венозных кровотечениях различной интенсивности, в том числе массивных, при открытых повреждениях мягких тканей, поверхностных и глубоких ранах кожи. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов. **Меры предосторожности:** Предназначено только для наружного применения. Не предназначено для повторного применения. Упаковку вскрыть непосредственно перед применением средства гемостатического. При попадании на слизистые оболочки обильно промыть проточной водой. При проявлении аллергических реакций прекратить применение средства гемостатического. Не применять при нарушении герметичности упаковки. Не применять по истечении срока годности. Средство гемостатическое должно быть удалено из раны не позднее 24 ч после применения и не ранее 3-х часов после применения. Средство гемостатическое может быть извлечено самостоятельно после остановки кровотечения, после чего на рану накладывается повязка, или при оказании медицинской помощи. **Условия хранения:** хранить в сухом месте при температуре +5 до +35 °C (упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от +5 до +40 °C (упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина). **Условия эксплуатации:** эксплуатация изделия при температуре -40 до +50 °C. **Утилизация:** средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 21.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с 21.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.

Адрес места производства:
АО «НПП «ИНТЕРКО»
140080, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, поселок Тураево,
стр. 8, зд. 121

Нетоксично. Однократного применения.
Номер партии, срок годности, дата
изготовления указаны на шве упаковки.



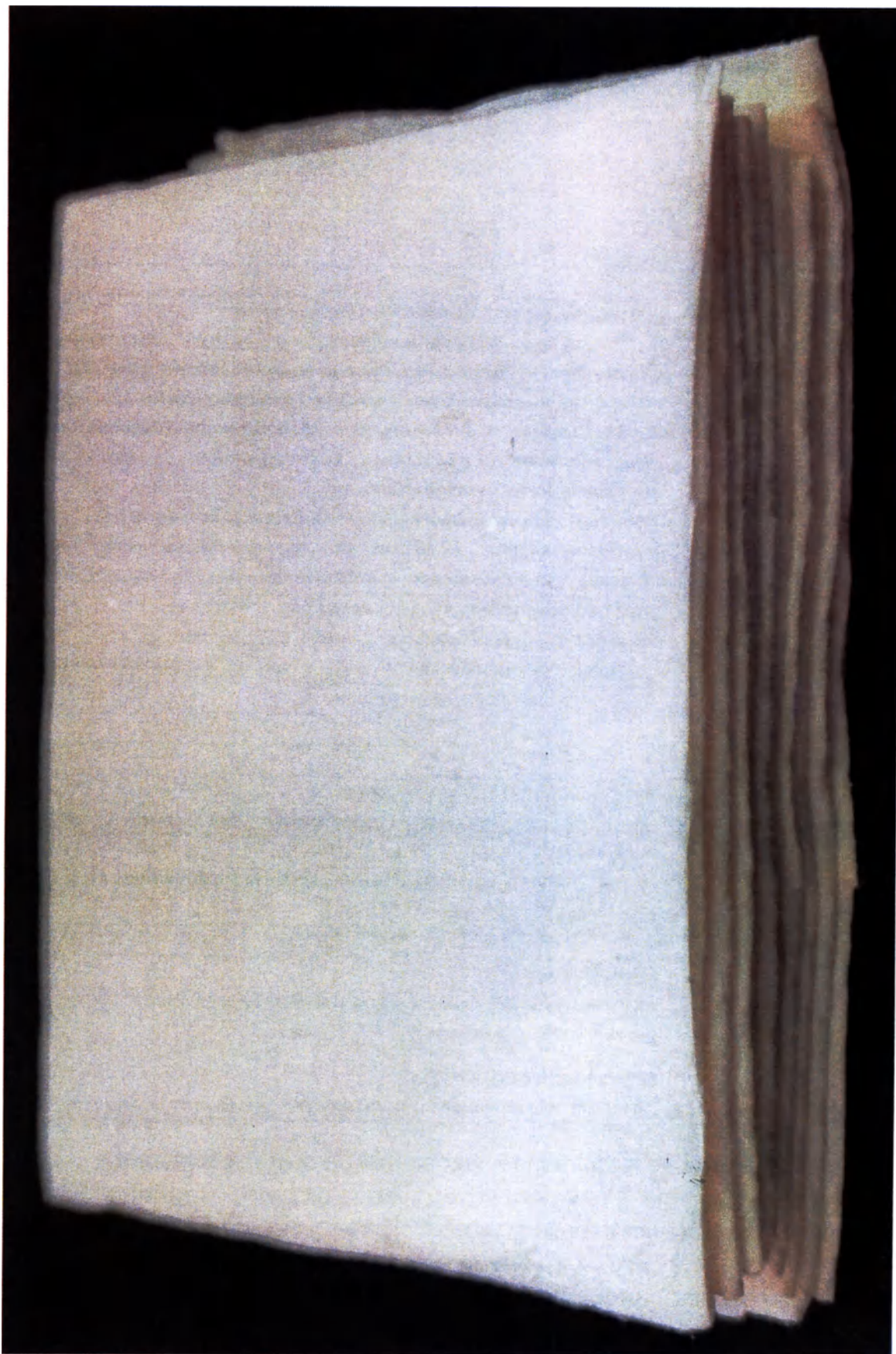

Маркировка групповой упаковки
Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ
21.20.24-002-66909893-2020 в вариантах исполнения:
Z-сложенный бинт размером: 2,5х5 см; 2,5х34,5 см; 2,5х50 см; 2,5х100 см;
8,0х50 см; 8,0х70 см; 8,0х80 см; 8,0х100 см; 8,0х150 см в индивидуальной
упаковке из материала упаковочного комбинированного.

Наименование изделия		Средство перевязочное гемостатическое "Гемотекс", стерильное по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020
Вариант исполнения		Z-сложенный бинт размером _____ см. в индивидуальной упаковке из материала упаковочного комбинированного.
Номер партии		
Производитель		АО «ПРОФИТ МЕДИКА» 123154, Россия, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 8, строение 3, этаж 6, пом. I, ком. 17
Адрес места производства		АО "НПП "ИНТЕРОКО", 140080, Московская область, г. Лыткарино, поселок Тураево, стр. 8, здание 121
Количество изделий		Шт.
Дата изготовления		...*....
Срок годности		3 года с даты стерилизации
Условия хранения		«Хранить при температуре от + 5 °С до + 35 °С (Упаковочный материал АО «Мультифлекс», Россия); от + 5 °С до + 40 °С (Упаковочный материал ООО «КДН №2», Украина)»
Утилизация		Средство гемостатическое с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованное после вскрытия упаковки, утилизируют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А. Использованное Средство гемостатическое или Средство гемостатическое, извлеченное из индивидуальной упаковки, подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации на момент утилизации.
Вес брутто, кг		
Номер и дата регистрационного удостоверения		РУ № от г.
Выпуск		по ТУ 21.20.24-002-66909893-2020
«Нетоксично»	Штрих-код	



Всего прочито, пронумеровано и скреплено
печатью 47 лист(ов)



Генеральный директор

АО «ПРОФИТ МЕДИКА» Э.А. Труфанов

19 01 2022 г.

