

Фотографии медицинского изделия:

Гипс стоматологический «ДЕНЕСТ» по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020»

производства АО «ЭУР-МЕД Денталдепо», Россия, 143360, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, г. Апрелевка, ул. Октябрьская, д.9

Генеральный директор АО «ЭУР-МЕД Денталдепо»»
(должность)

(подпись и печать Заявителя)



С.Г. Козлов
(И.О.Фамилия)



Фото 1-А. Общий внешний вид варианта исполнения Гипс стоматологический «ДЕНЕСТ-Рок» сверхпрочный, коричнево-золотистый, (5 кг/уп.); в потребительской





Применение стоматологического гипса "Денест-Рок"

Это изделие применяется в зуботехнических лабораториях для изготовления рабочих и контрольных моделей, штампов при несъемном протезировании. Отличается низким расширением, стойкостью к сколам и расслоению.

Инструкция по применению:

Перед началом смешивания гипсовый порошок должен иметь температуру условий эксплуатации (от +20°C до +25°C). Оборудование для замешивания должно быть сухим и чистым.

* Взвесьте на весах 100 г гипсового порошка и отмерьте 22 мл дистиллированной воды. Медленно засыпьте гипсовый порошок в контейнер с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности воды.

* Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы гипса самостоятельно затворились водой, постепенное насыщение гипса водой предупреждает образование комков.

* Круговыми движениями энергично производите размешивание в течение 60 секунд шпателем для гипса. При использовании миксера время смешивания можно сократить до 30 секунд вне зависимости от применения вакуума, до получения однородной массы консистенции сметаны.

* Готовую гипсовую смесь немедленно залейте в форму. Заливка смеси должна быть закончена в пределах рабочего времени.

* Для получения миниатюрных деталей модели необходима крошечная добавка из смеси воздушных пузырьков. Для этого залитую гипсовым раствором форму поместите на вибростол. Формы не должны подвергаться вибрации после окончания рабочего времени.

* Извлеките гипсовую модель из отпрессованной высушенной смеси.

* При работе используйте защитные очки, маску, респиратор.



Фото 1.Р. Маркировка потребительской упаковки варианта исполнения Гипс стоматологический «ДЕНЕСТ-Рок» сверхпрочный, коричнево-золотистый (5 кг/уп.)





Технические характеристики

Гипс стоматологический «Денест-Рок»

Сверхпрочный по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Цвет: коричнево-золотистый

ГОСТ 31568: тип 4

Пропорция: 22мл / 100г

Время смешивания: 30 / 60 сек

Время работы: 8 – 10 мин

Начало схватывания: 13 мин

Время затвердевания: 16 – 20 мин

Расширение через 24: 0,1%

Прочность через 1 ч: 50 МПа

Рекомендуемый метод смешивания: вакуумный миксер (предпочтительно) или ручное

Регистрационное удостоверение
РЗН №2021/15048



Фото 1. П. Маркировка потребительской упаковки варианта исполнения Гипс стоматологический «ДЕНЕСТ-Рок» сверхпрочный, коричнево-золотистый (5 кг/уп.)

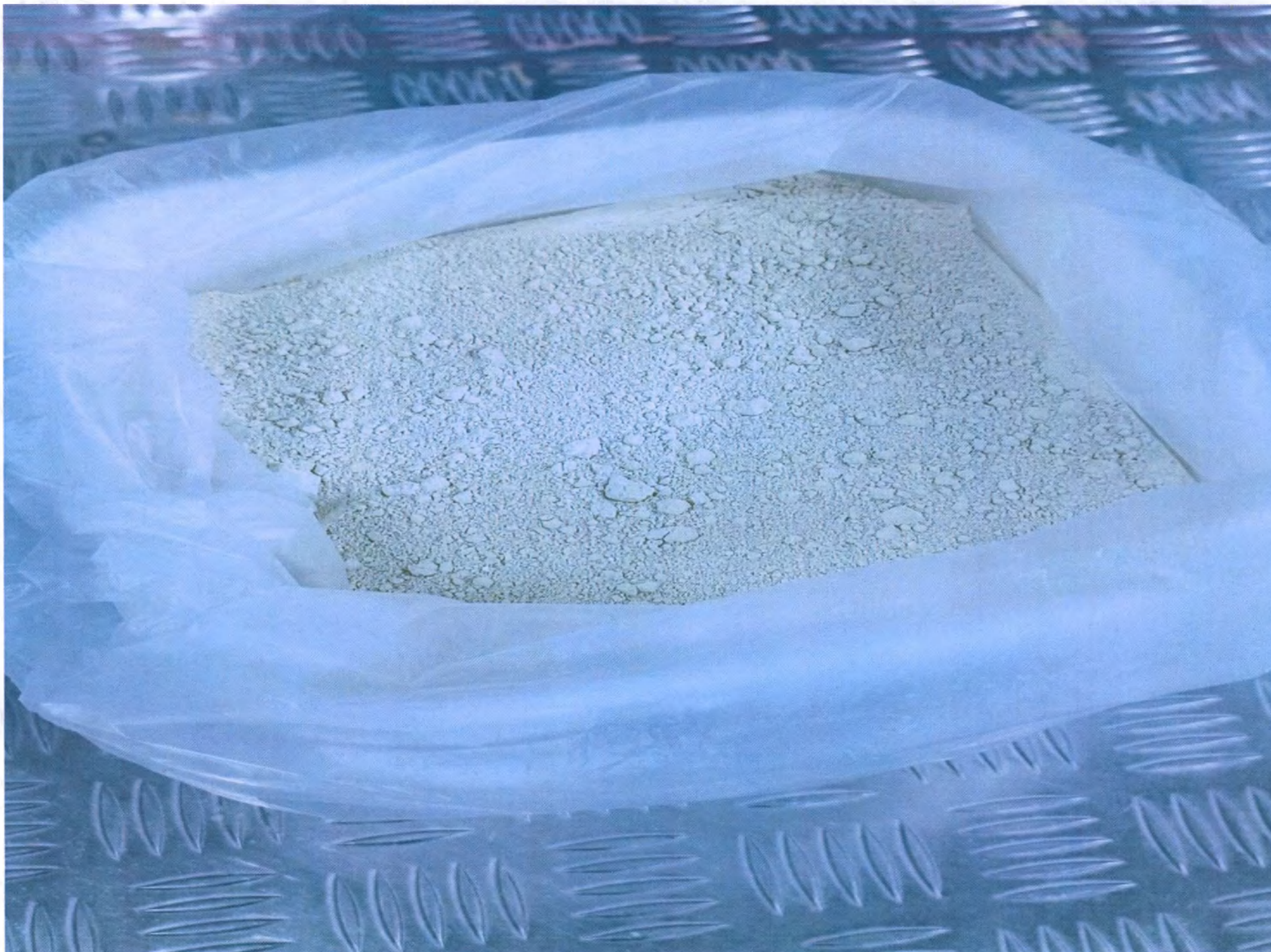


Фото 1-Е. Гипс стоматологический «ДЕНЕСТ-Рок» сверхпрочный, коричнево-золотистый (5 кг/уп.) в открытой упаковке.



Фото 2-А. Гипс стоматологический «ДЕНЕСТ-Солид» высокопрочный, голубой, (5 кг/уп.); в открытой упаковке.




Гипс стоматологический "Денест"
по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31568: тип 3
Цвет: ГОЛУБОЙ
Пропорция: 30мл / 100г
Время смешивания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 - 12 мин
Начало схватывания: 15 мин
Время затвердевания: 20 - 24 мин
Расширение через 2ч: 0,18%
Прочность через 1 ч: 28 МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручное

Денест-Солид
Гипс стоматологический "Денест-Солид" высокопрочный, голубой

10 кг
ДЕНЕСТ

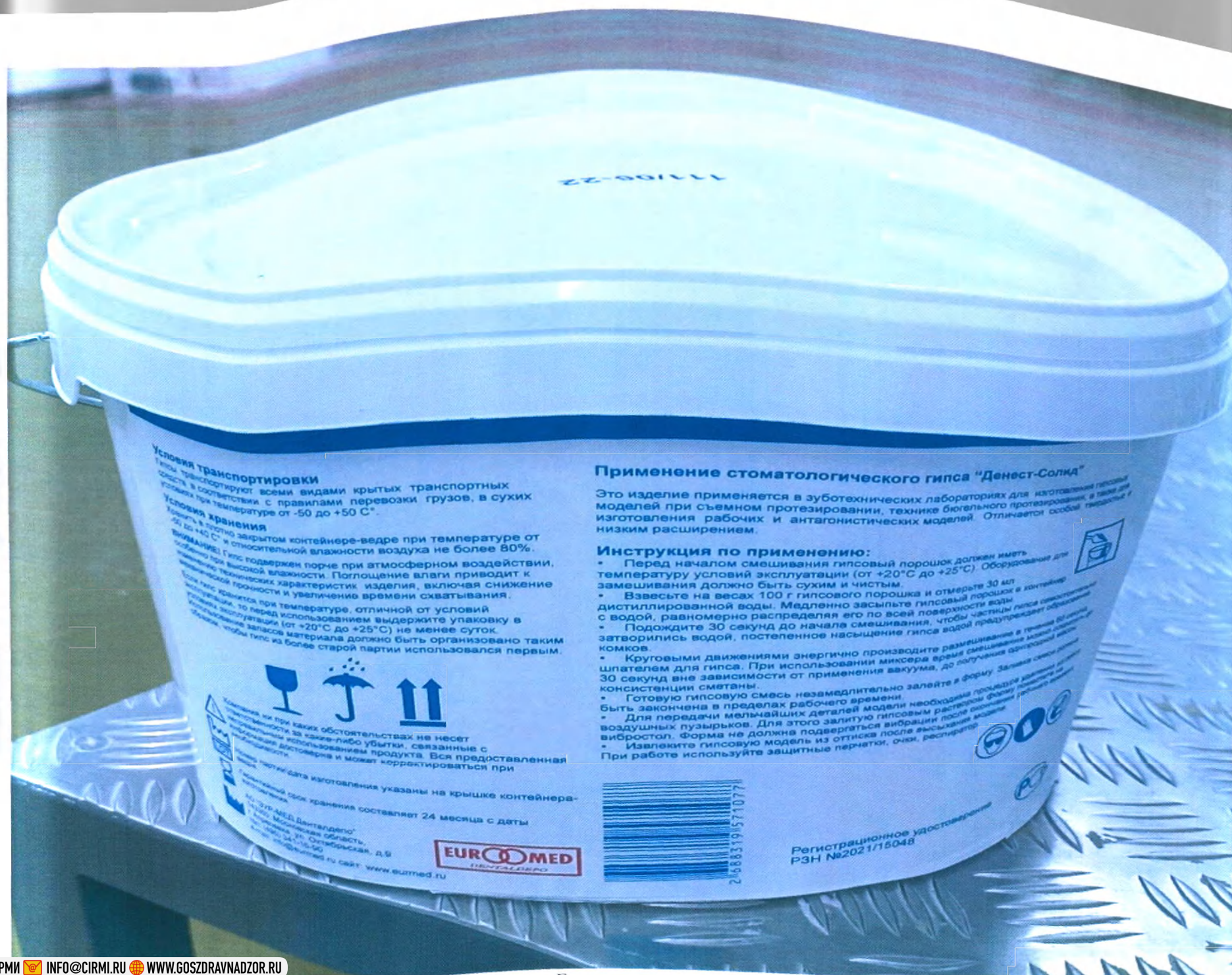

Условия транспортировки

Гипс транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, в сухих условиях при температуре от -50 до +50 °С.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытом контейнере-ведре при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при высокой влажности. Поглощение влаги приводит к изменению технических характеристик изделия, включая снижение механической прочности и увеличение времени схватывания.

Если гипс хранится при температуре, отличной от условий эксплуатации, то перед использованием выдержите упаковку в сухих условиях (от +20 °С до +25 °С) не менее суток. Использование запасов материала должно быть организовано таким образом, чтобы гипс из более старой партии использовался первым.

Упаковка, на которой изображены следующие знаки, не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с использованием продукта. Вся предоставленная информация достоверна и может корректироваться при изменении условий хранения.

Срок годности и дата изготовления указаны на крышке контейнера-ведра.

Срок хранения составляет 24 месяца с даты изготовления.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «ДЕНЕСТ-СОЛИД»
г. Москва, Московская область,
г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 5
тел./факс: 8 (495) 511-15-50
e-mail: info@euromed.ru сайт: www.euromed.ru

EUROMED
DENTAL

Применение стоматологического гипса "Денест-Соллид"

Это изделие применяется в зуботехнических лабораториях для изготовления гипсовых моделей при съемном протезировании, технике бюгельного протезирования, а также для изготовления рабочих и антагонистических моделей. Отличается особой твердостью и низким расширением.

Инструкция по применению:

- Перед началом смешивания гипсовый порошок должен иметь температуру условий эксплуатации (от +20 °С до +25 °С). Оборудование для замешивания должно быть сухим и чистым.
 - Взвесьте на весах 100 г гипсового порошка и отмерьте 30 мл дистиллированной воды. Медленно засыпьте гипсовый порошок в воду с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности воды.
 - Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы гипса равномерно затворились водой, постепенное насыщение гипса водой предупреждает образование комков.
 - Круговыми движениями энергично производите размешивание в течение 60 секунд шпателем для гипса. При использовании миксера время смешивания можно сократить до 30 секунд вне зависимости от применения вакуума, до получения однородной массы консистенции сметаны.
 - Готовую гипсовую смесь немедленно заливайте в форму. Заливка смеси должна быть закончена в пределах рабочего времени.
 - Для передачи мельчайших деталей модели раствором гипса необходимо использовать вибростол. Форма не должна подвергаться вибрации после заливки гипса.
 - Извлеките гипсовую модель из отливки после высыхания модели.
- При работе используйте защитные перчатки, очки, респиратор.



Регистрационное удостоверение
РЗН №2021/15048



Гипс стоматологический «Денест»
по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31568, тип 3
Пропорция: 30мл / 100г
Время смешивания: 30 мин
Время работы: 10 - 12 мин
Начало схватывания: 15 мин
Время затвердевания: 20 - 24 мин
Расширение через 2ч: 0,18%
Прочность через 1ч: 26,6 МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (оборудован пылесосом)
или ручное

Денест-Солид
стоматологический гипс «Денест-Солид» высокопрочный для моделей

Условия транспортировки

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, в сухих контейнерах при температуре от -50 до +50 °С.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытом контейнере-ведре при температуре от 5 до -40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Внимание! Гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при высокой влажности. Поглощение влаги приводит к ухудшению технических характеристик изделия, включая снижение механической прочности и увеличение времени схватывания.

Если гипс хранится при температуре, отличной от условий эксплуатации, то перед использованием выдержите упаковку в условиях эксплуатации (от +20 °С до +25 °С) не менее суток. Использование запасов материала должно быть организовано таким образом, чтобы гипс из более старой партии использовался первым.



Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с неправильным использованием продукта. Вся предоставленная информация достоверна и может корректироваться при необходимости.

Номер партии/дата изготовления указаны на крышке контейнера-ведра.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца с даты изготовления.

АО "ЭУР-МЕД Денталдепо"
143960, Московская область,
г. Астрелья, ул. Октябрьская, д. 9
тел: (496) 341-16-90
e-mail: info@eurmed.ru
сайт: www.eurmed.ru





Применение стоматологического гипса "Денест-Солид"

Это изделие применяется в зуботехнических лабораториях для изготовления моделей при съемном протезировании, технике бюгельного протезирования, а также для изготовления рабочих и антагонистических моделей. Отличается высокой прочностью и низким расширением.

Инструкция по применению:

- Перед началом смешивания гипсовый порошок должен иметь температуру условий эксплуатации (от +20 °С до +25 °С). Оборудование для замешивания должно быть сухим и чистым.
 - Взвесьте на весах 100 г гипсового порошка и отмерьте 30 мл дистиллированной воды. Медленно засыпьте гипсовый порошок в емкость с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности воды.
 - Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы гипса полностью затворились водой, постепенное насыщение гипса водой предупреждает образование комков.
 - Круговыми движениями энергично производите размешивание в течение 30 секунд шпателем для гипса. При использовании миксера время смешивания можно сократить до 30 секунд вне зависимости от применения вакуума, до получения однородной массы консистенции сметаны.
 - Готовую гипсовую смесь незамедлительно залейте в форму. Заливка смеси должна быть закончена в пределах рабочего времени.
 - Для передачи мельчайших деталей модели необходима прокладка изделия от воздушных пузырьков. Для этого залитую гипсовым раствором форму поместите в вибростол. Форма не должна подвергаться вибрации после окончания работы.
 - Извлеките гипсовую модель из оттиска после высыхания модели.
- При работе используйте защитные перчатки, очки, респиратор.

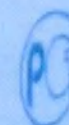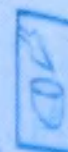

Регистрационное удостоверение
РЗН № 2021/15048





Гипс стоматологический "Денест"
по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31568: тип 3
Пропорция: 30мл / 100г
Время смешивания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 - 12мин
Начало схватывания: 15мин
Время затвердевания: 20 - 24мин
Расширение через 2ч: 0,18%
Прочность через 1 ч: 28МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручной

Денест-Солид

высокопрочный для моделей
□ Белый

Денест-Солид

гипс стоматологический "Денест-Солид" высокопрочный

цвет: ☐ желтый ☐ розовый ☒ **зеленый** ☐ бел





Гипс стоматологический «Денест»
по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31568; тип 3
Пропорция: 30мл / 100г
Время смешивания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 – 12 мин
Начало схватывания: 15 мин
Время затвердевания: 20 – 24 мин
Расширение через 24 ч: 0,18%
Прочность через 1 ч: 28 МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручное

Денест-Солид
тип 3, стоматологический
белый

Гипс стоматологический «Денест-Солид» высокопрочный для моделей
☐ БЕЛЫЙ

Условия транспортировки

Гипс транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, в сухих контейнерах при температуре от -50 до +50 °C.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытом контейнере-ведре при температуре от -5 до +42 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Внимание! Гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при высокой влажности. Поглощение влаги приводит к изменению технических характеристик изделия, включая снижение механической прочности и увеличение времени схватывания.

Гипс хранится при температуре, отличной от условий эксплуатации, то перед использованием выдержите упаковку в условиях эксплуатации (от +20°C до +25°C) не менее суток. Использование запасов материала должно быть организовано таким образом, чтобы гипс из более старой партии использовался первым.



Компания не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с неправильным использованием продукта. Вся предоставленная информация достоверна и может корректироваться при необходимости.



Партии и дата изготовления указаны на крышке контейнера-ведра.



Срок хранения составляет 24 месяца с даты изготовления.



АО "ЗУР-МЕД Денталдепо"
143950, Московская область,
г. Апрелевка, ул. Октябрьская, д. 9
тел: (495) 341-15-90
e-mail: info@eurmed.ru
сайт: www.eurmed.ru





Применение стоматологического гипса "Денест-Солид"

Это изделие применяется в зуботехнических лабораториях для изготовления моделей при съемном протезировании, технике бюстельного протезирования, а также для изготовления рабочих и антагонистических моделей. Отличается особым качеством и низким расширением.

Инструкция по применению:

- Перед началом смешивания гипсовый порошок должен иметь температуру условий эксплуатации (от +20°C до +25°C). Оборудование для замешивания должно быть сухим и чистым.
 - Взвесьте на весах 100 г гипсового порошка и отмерьте 30 мл дистиллированной воды. Медленно засыпьте гипсовый порошок в контейнер с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности воды.
 - Подождите 30 секунд до начала смешивания, чтобы частицы гипса достаточно затворились водой, постепенное насыщение гипса водой предупреждает образование комков.
 - Круговыми движениями энергично производите размешивание в течение 10 минут шпателем для гипса. При использовании миксера время смешивания не должно превышать 30 секунд вне зависимости от применения вакуума, до получения однородной массы консистенции сметаны.
 - Готовую гипсовую смесь незамедлительно залейте в форму. Заливка должна быть закончена в пределах рабочего времени.
 - Для передачи мельчайших деталей модели необходима процедура удаления из смеси воздушных пузырьков. Для этого залитую гипсовым раствором форму поместите на вибростол. Форма не должна подвергаться вибрации после окончания работы.
 - Извлеките гипсовую модель из оттиска после высыхания модели.
- При работе используйте защитные перчатки, очки, респиратор.

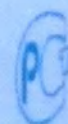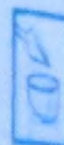

Регистрационное удостоверение
РЗН № 2021/15048





Гипс стоматологический "Денест"
по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31568: тип 3
Пропорция: 30мл / 100г
Время смешивания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 - 12мин
Начало схватывания: 15мин
Время затвердевания: 20 - 24мин
Расширение через 2ч: 0,18%
Прочность через 1 ч: 28МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручное

Денест-Солид

Гипс стоматологический "Денест-Солид" высокопрочный для моделей
■ БЕЛЫЙ

10кг
ДЕНЕСТ







Гипс стоматологический "Денест" по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31568, тип 3
Пропорция: 30 мл / 100 г
Время смешивания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 - 12 мин
Начало схватывания: 15 мин
Время затвердевания: 20 - 24 мин
Расширение через 2 ч: 0,18 %
Расширение через 1 ч: 28 МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручное

ДЕНЕСТ

Денест-Солид

гипс стоматологический "Денест-Солид" высокопрочный для моделей
цвет: ☒ БЕЛЫЙ

25 кг

Условия транспортировки

Гипсы транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, в сухих условиях при температуре от -50 до +50 °С.

Условия хранения

Хранить в герметичной упаковке при температуре от -50 до +40 °С в относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при высокой влажности. Поступление влаги приводит к изменению технологических характеристик изделия, включая снижение механической прочности и увеличение времени схватывания.

Если гипс хранится при температуре, отличной от условий эксплуатации, то перед использованием его необходимо выдержать при температуре от +20 °С до +25 °С не менее 24 часов. Использование запечатанного материала должно быть организовано таким образом, чтобы гипс из более старой партии использовался первым.



Клейкий материал при сильном облучении не несет ответственности за любые виды работ, связанных с использованием высокоточных инструментов. Для предотвращения деформации изделия и потери работоспособности при использовании.



Пример маркировки упаковки

111/06 - 22

Гипс "ДЕНЕСТ-Солид" соответствует 24 классу и имеет маркировку:

АО "ЭУР-МЕД Дентал" 
г. Астана, Московская область,
пос. (аэро) ЗДТ, 15 Октябрьский, д. 9
e-mail: info@eur-med.ru
сайт: www.eur-med.ru



Применение стоматологического гипса "Денест-Солид"

Это изделие применяется в зуботехнической лаборатории для изготовления моделей при съемном протезировании, техника быстрого протезирования и изготовления рабочих и детализационных моделей. Отличается robust, термостойкостью и расширением.


Инструкция по применению:

- Перед началом смешивания гипсовый порошок должен иметь температуру условий эксплуатации (от +20 °С до +25 °С). Обеспечение для замешивания должно быть сухим и чистым.
- Воздушная масса 100 г гипса и воды в объеме 30 мл.
- Воздушная масса 100 г гипса и воды в объеме 30 мл.
- Водой равномерно распределять всю массу гипсовой массы.
- Подвергать 30 секунд до начала схватывания, чтобы частицы гипса равномерно распределялись.
- Крупными движениями энергично производить размешивание в течение 60 секунд.
- 30 секунд выждать от лишней влаги, до получения однородной массы.
- Готовую гипсовую смесь незамедлительно залить в форму. Заливка смеси должна быть закончена в предельно короткий срок.
- Для получения минимальных деформаций гипсовую смесь залить в форму, предварительно смазанную маслом.
- Для получения минимальных деформаций гипсовую смесь залить в форму, предварительно смазанную маслом.
- Изделие подвергнуть воздействию влаги, чтобы избежать растрескивания.
- При работе использовать защитные перчатки, очки, респиратор.



Регистрационное удостоверение
РЗН № 2021/15048



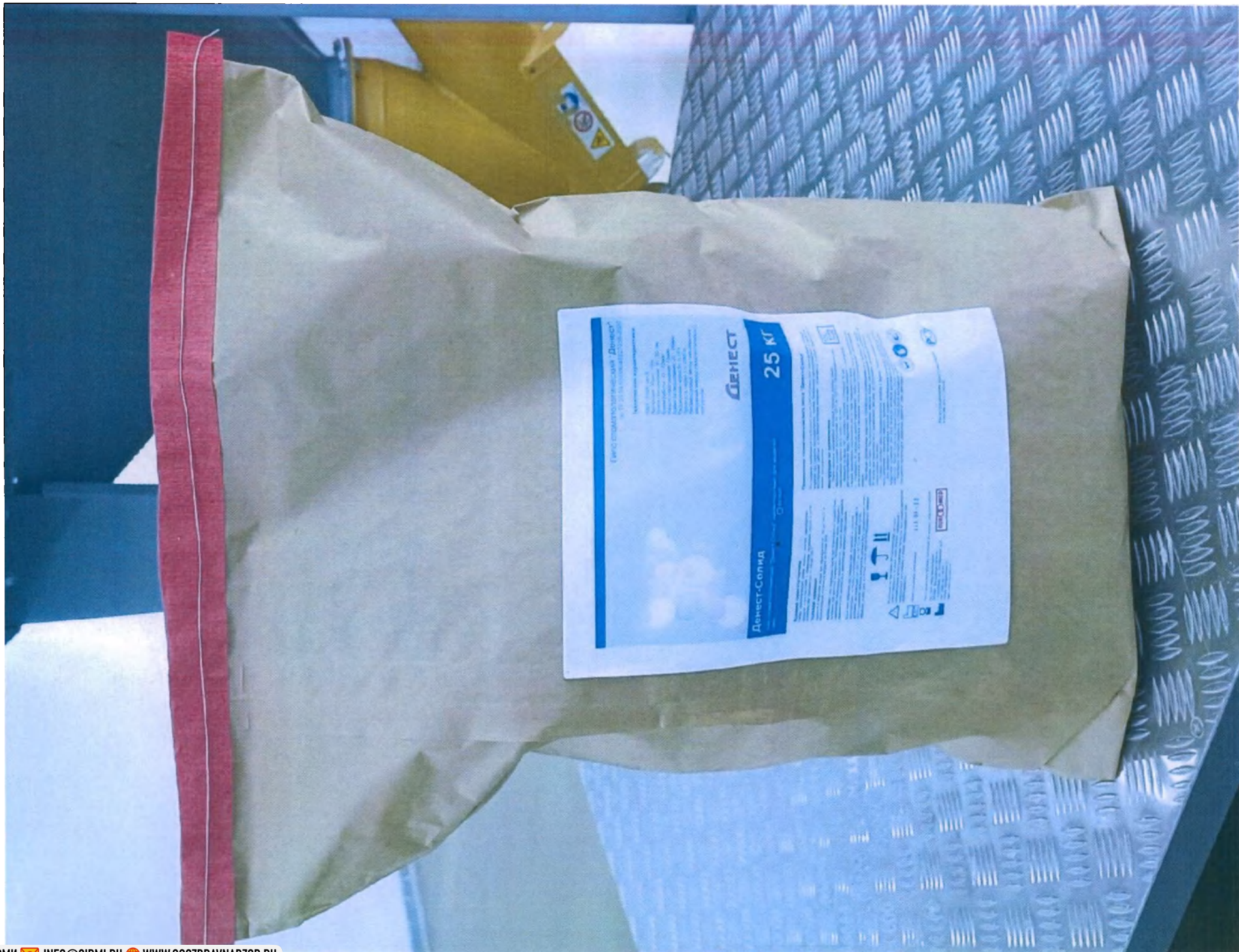

Гипс стоматологический "Денест"

по ТУ 20.59.52-006-40227038-2026

Технические характеристики

ГОСТ 31568-тип 3
Прочность: 30МПа / 100Н
Время схватывания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 - 12 мин
Начало затвердевания: 15 мин
Время затвердевания: 20 - 24 мин
Расширение через 24 ч: 0,16%
Прочность через 1 ч: 20 МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручное

ДЕНЕСТ

Денест-Солид

Гипс стоматологический "Денест-Солид" высокопрочный для моделей

цвет ☐ БЕЛЫЙ

25 кг

Условия транспортировки

Гипсы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов в сухих условиях при температуре от -50 до +50 °С.

Условия хранения

Хранить в закрытом мешке при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при высокой влажности. Поглощение влаги приводит к изменению технических характеристик: набуханию, вспучиванию, снижению прочностных и увеличению времени схватывания.

Если гипс крошится при транспортировке, отпавшей от условий эксплуатации, то перед использованием выдержите упаковку в сухом месте при температуре от +20 °С до +25 °С не менее суток. Уменьшение влажности материала должно быть организовано таким образом, чтобы гипс из более старой партии использовался первым.



Клеящая не приклеивается на влажные поверхности, не имеет отщепляемости за какой-либо участок, сохраняет с ней прочностные и эксплуатационные свойства. Все предоставленные характеристики являются ориентировочными и могут корректироваться при необходимости.

Наличие партии/даты изготовления

111/06-22

Гипсовый гипс моделирующий составляет 24 мешка в бумажной упаковке.
АО "ЦИРМИ ДЕНЕСТ" 143700, Московская область,
г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 6
Тел: (495) 341 18 90
e-mail: info@cirmi.ru
сайт: www.cirmi.ru



Применение стоматологического гипса "Денест-Солид"

Это изделие применяется в зуботехнических лабораториях для изготовления гипсовых моделей при съемном протезировании, такела беззубых протезов, а также для изготовления рабочих и анатомических моделей. Отличается особой твердостью и низким расширением.

Инструкция по применению:

- Перед началом смешивания гипсовый порошок досыпает в емкость, температуру которой эксплуатации (от +20 °С до +25 °С). Оборудование для замешивания должно быть сухим и чистым.
- Всыпать на вес 100 г гипсового порошка в стиральную 30 мл дистиллированной воды. Мгновенно засыпать гипсовый порошок в воду, равномерно распределяя его по поверхности воды.
- Подкачать 30 секунд воздухом, чтобы гипс равномерно распределился по поверхности воды, предотвратить образование комочков.
- Крупными движениями энергично проводить размешивание в течение 60 секунд шпателем для гипса. При этом гипсовый материал для получения однородной массы 30 секунд вне зависимости от применения вакуума, для получения однородной массы комочков не должно быть.
- Готовую гипсовую смесь немедленно залить в форму. Застывшая смесь должна быть замешана в течение 10 минут, чтобы избежать растрескивания модели. Для этого гипсовую гипсовую смесь равномерно распределить по поверхности. Для этого гипсовую гипсовую смесь равномерно распределить по поверхности. Для этого гипсовую гипсовую смесь равномерно распределить по поверхности.
- Карандаш гипсовую модель из оттока после застывания.

При работе использовать защитные перчатки, очки, респиратор.



Регистрационное удостоверение
РЗН № 2021/15048











Гипс стоматологический "Денест"

по ТУ 20 59 52-005-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31595-2013
Пропорция: 30мл / 100г
Время смешивания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 - 12 мин.
Начало схватывания: 15 мин
Время затвердевания: 20 - 24 мин
Расширение через 2ч: 0,16%
Прочность через 1 ч: 26МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручной

ДЕНЕСТ

25 кг

Денест-Солид

гипс стоматологический "Денест-Солид" высокопрочный для моделей
цвет:  **БЕЛЫЙ**

Условия транспортировки

Гипс транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в сухих условиях при температуре от -50 до +50 °С.

Условия хранения

Хранить в закрытой мешке при температуре от -50 до +40 °С в относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при высокой влажности. Гипс, подвергшийся воздействию влаги, теряет свои механические характеристики и увеличивает время схватывания.

Если гипс хранится при температуре, отличной от условий эксплуатации, то перед использованием выдержите упаковку в условиях эксплуатации (от +20 °С до +25 °С) не менее суток. Истекшие сроки годности не являются гарантией качества продукта, чтобы гипс из более старых партий использовался без риска.



Каналы и при заливке объектами не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с использованием данного продукта. Вся предоставленная информация достоверна и может использоваться при необходимости.

Номер партии/даты изготовления

111/06 - 22

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца с даты изготовления.

АО "ЭУР МЕД ДЕНЕСТ" 143360, Московская область, с. Адретина, ул. Октябрьская, д.9
тел: (495) 341-18-90
e-mail: info@eurmed.ru
сайт: www.eurmed.ru



Применение стоматологического гипса "Денест-Солид"

Это изделие применяется в зуботехнических лабораториях для изготовления гипсовых моделей при съемном протезировании, темная большая упаковка предназначена также для изготовления рабочих и анатомических моделей. Отличается особой прочностью и легким расширением.

Инструкция по применению:

- Готовую гипсовую смесь необходимо использовать в течение 30 секунд после приготовления (от +20 °С до +25 °С). Обеспечение для замешивания должно быть сухим и чистым.
- Всыпать на вески 100 г гипсового порошка и в мерить 30 мл дистиллированной воды. Медленно засыпать гипсовый порошок в емкость с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности. Через 10 секунд гипс должен полностью схватиться. Гипс можно использовать для изготовления моделей.
- Готовыми замешенными энергично производить размешивание в течение 30 секунд 30 секунд. При использовании миксера время смешивания может отличаться в зависимости от применяемого вакуума. До получения однородной массы.
- Готовую гипсовую смесь немедленно залить в форму. Залитая смесь должна быть готова к использованию в течение 30 секунд.
- Для получения в процессе работы гипсовых моделей необходимо использовать воздушные турбины. Для этого заготовить гипсовый порошок, форму поместить на выбранный объект. Форма не должна подвергаться вибрации после окончания рабочего периода.
- Упаковать гипсовую модель на отсыла после высыхания массы.

При работе использовать защитные перчатки, очки, респиратор.



Регистрационное удостоверение
РЗН № 2021/15048





Гипс стоматологический "Денест"
по ТУ 20.59.52-006-40227038-2020

Технические характеристики:

ГОСТ 31998: тип 3
Цвет: ГОЛУБОЙ
Пропорция: 30мл / 100г
Время смешивания: 30 / 60 сек
Время работы: 10 - 12 мин
Начало схватывания: 15 мин
Время затвердевания: 20 - 24 мин
Расширение через 2ч: 0,15%
Прочность через 1 ч: 28МПа
Рекомендуемый метод смешивания:
вакуумный миксер (предпочтительно)
или ручной

СЕНЕСТ

Денест-Солид

25 кг

Условия транспортировки

Гидро-транспортирует. Вспомогательные, крытые транспортные средства, в соответствии с правилами перевозки грузов, в сухих условиях при температуре от -50 до +50 С°

Условная кривая

Хранить в закрытом виде при температуре от -50 до +40 С° и относительной влажности воздуха не более 80%.

Выводы: Гибель животных вызвана при атмосферных воздействиях, усилением при высокой влажности. Гипотеза о том, приводит к увеличению численности паразитов, вероятно, связано с усилением антропогенной деятельности и увеличением времени существования.

Если при проведении при температуре, отличной от указанной, то метод использованного вещества применять в указанных температурных (от -20°C до $+20^{\circ}\text{C}$) не имеет смысла. Максимальное значение температуры должно быть определено таким образом, чтобы оно не было слишком низким, иначе может возникнуть



 Осторожно при использовании не носите перчатки из латекса, резины, пластика и подобных материалов, так как они могут повредить поверхность изделия. Для предотвращения повреждения изделия и личной безопасности при использовании.

Keywords: *self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat effects, self-esteem threat effects on self-esteem, self-esteem threat effects on self-esteem, self-esteem threat effects on self-esteem*

111:06-22

400 549-5525 (toll-free)
 1-800-549-5525 (toll-free)
 1-800-549-5525 (toll-free)
 1-800-549-5525 (toll-free)
 1-800-549-5525 (toll-free)


 EURO MED
 1-800-549-5525 (toll-free)



26424510

Применение стоматологического гилса "Данест-Соллид"

Это изделие применяется в зуботехнической лаборатории для изготовления гипсовых моделей при съемном протезировании, техники бюбального протезирования, а также для изготовления рабочих и анатомических моделей. Отличается особой твердостью и низким расширением.


Инструкция по применению:

- После окончания приготовления смеси глицерин с маслом должен иметь температуру $20-25^{\circ}\text{C}$. Температуру смеси глицерин-масло можно измерить, погружая в нее термометр.
- После приготовления смеси глицерин-масло необходимо добавить в нее следующие ингредиенты:
- Всыпать на весов 100 г глицеринового порошка и открыть 30 мл дистиллированной воды. Медленно насыпать глицериновый порошок в смесь с водой, равномерно распределяя его по всей поверхности воды.
 - Подждать 30 секунд до полного замешивания, чтобы частицы глицерина равномерно распределились в воде, после чего насыпать глицерин, чтобы предотвратить образование комков.
 - Промешать растворенные ингредиенты, перемешивая равномерно в течение 60 секунд скатывая для густоты. При перемешивании материал должен становиться более густым до 30 секунд вне зависимости от применяемых инструментов, до получения однородной массы консистенции сметаны.
 - Сформировать глицериновую смесь, нарезав глицериновые шарики в форму. Залить смесь водой и выложить в подготовленные емкости.
 - После заливки в емкости добавить ингредиенты, которые придают увеличение на срок действия препарата. Для этого добавить глицериновый раствор в форму, которую вы использовали для заливки. Для этого поместить в форму раствор глицерина, который вы использовали. Форма на данный момент должна быть готова к дальнейшему использованию.
 - Изменить температуру смеси, на которую была выставлена температура.
- При работе использовать защитные перчатки, очки, одежду.







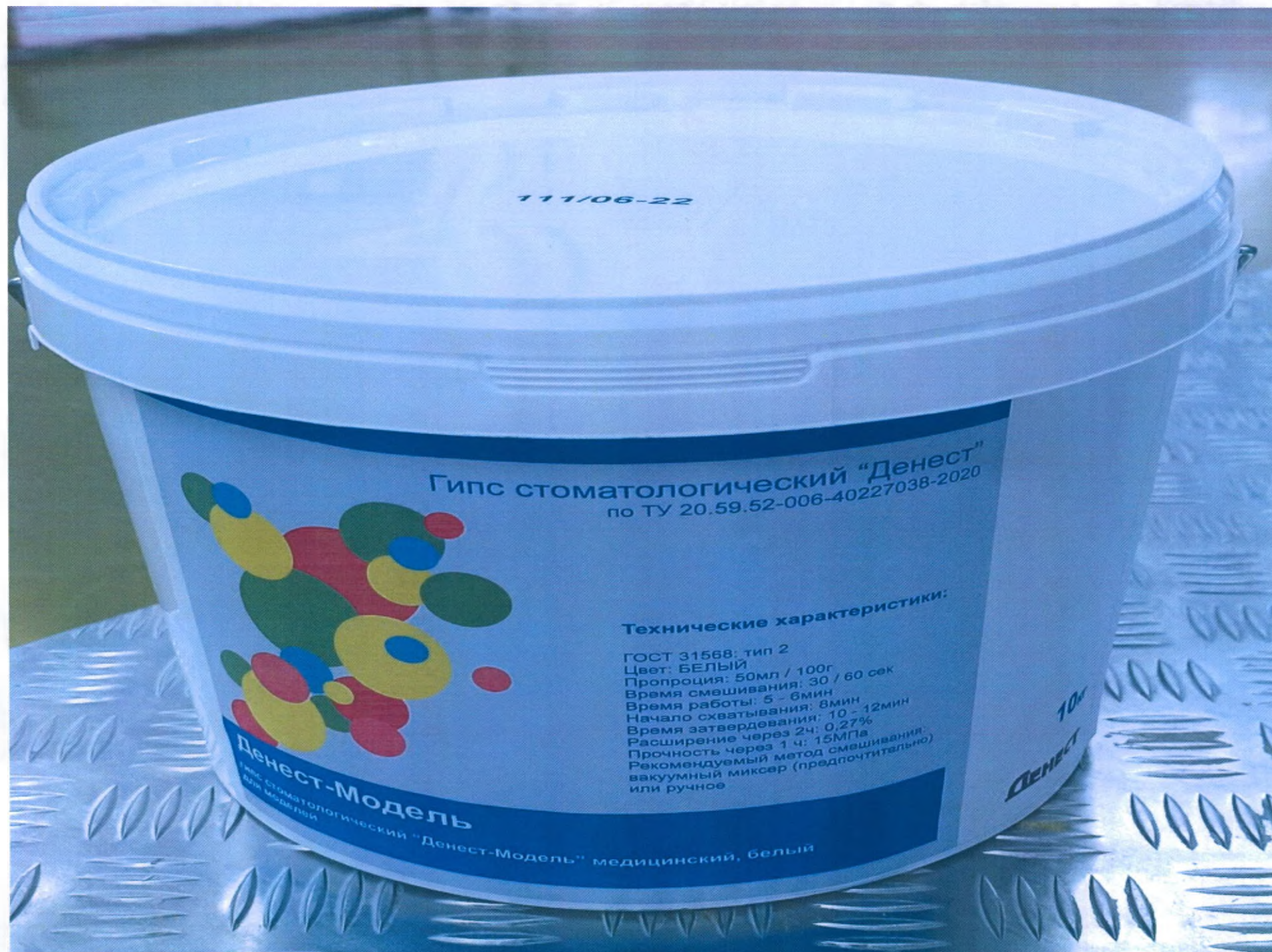


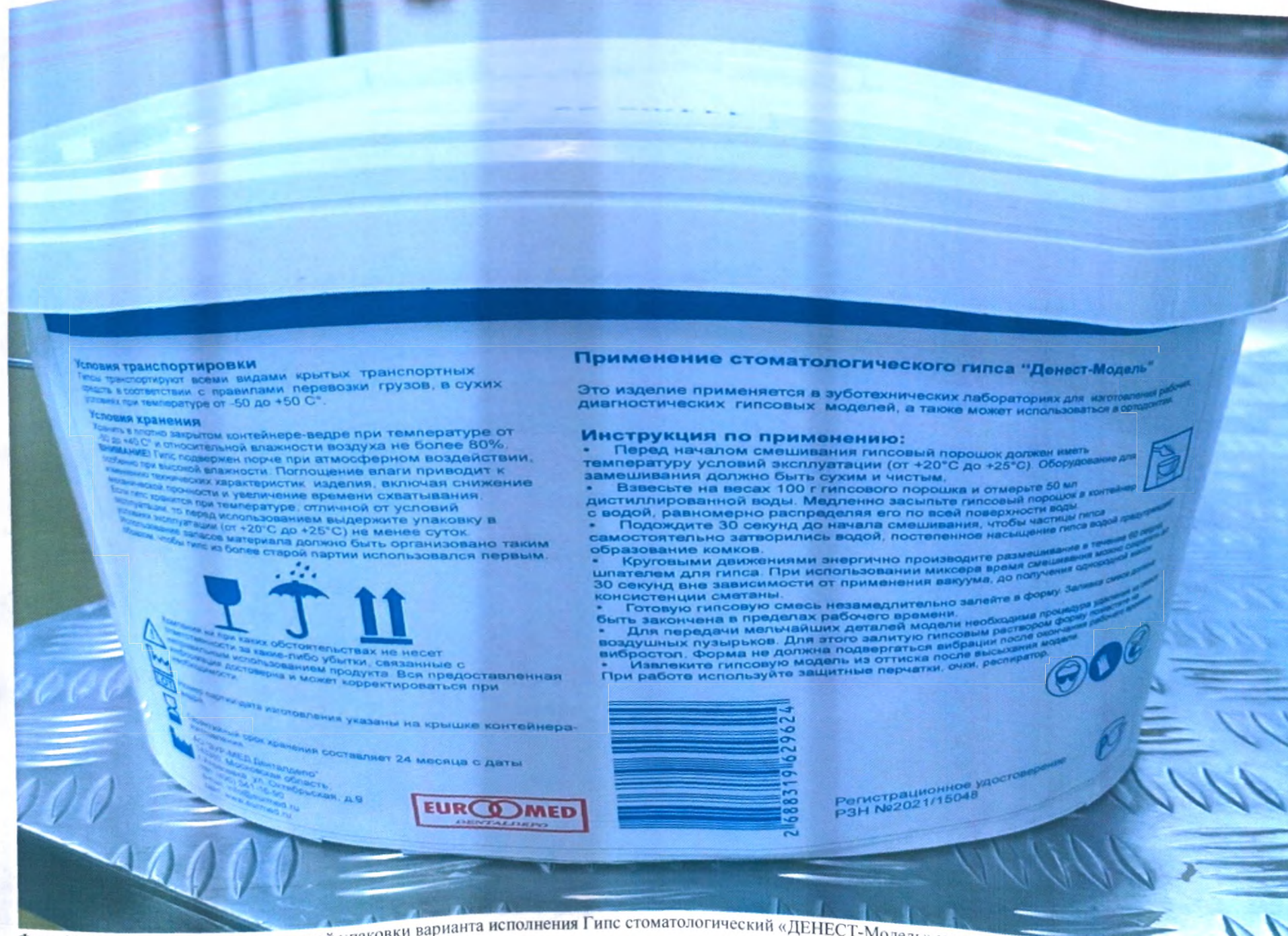


Фото 12-Б. Маркировка потребительской упаковки варианта исполнения Гипс стоматологический «ДЕНЕСТ-Модель» медицинский, белый, 10 кг/уп. .





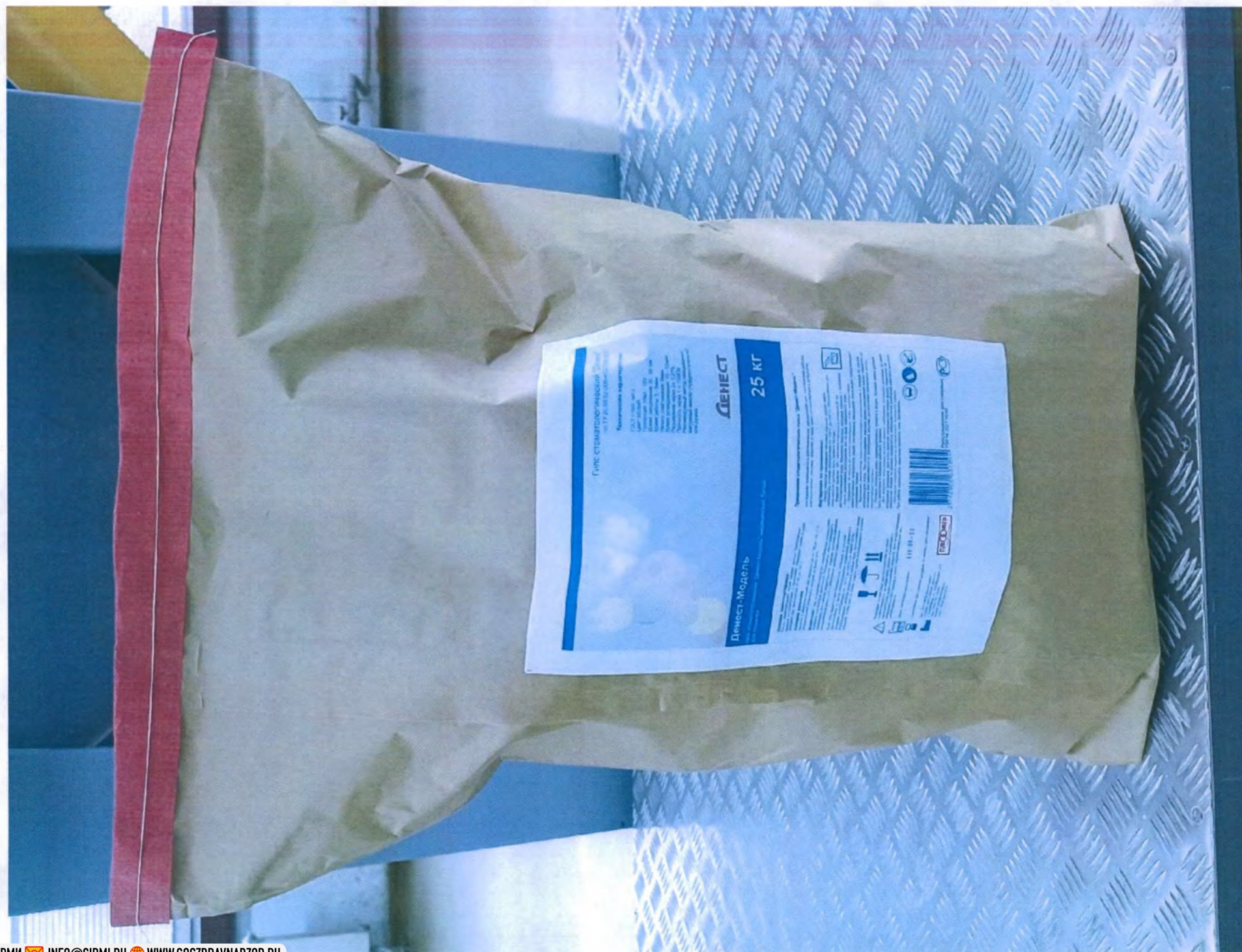

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 45 листа(ов)
Генеральный директор
АО «ЭУР-МЕД Денталдепо»
_____ Козлов С.Г.

